


Фотографические изображения медицинского изделия

Устройства полимерные для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильные ПР 23-05-«МПК «Елец» с иглами инъекционными по ТУ 32.50.13-017-74017482-2018, производства ООО «МПК «Елец», Россия



Фотография 1. Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное ПР 23-05-«МПК «Елец» с иглой инъекционной по ТУ 32.50.13-017-74017482-2018 Общий вид.

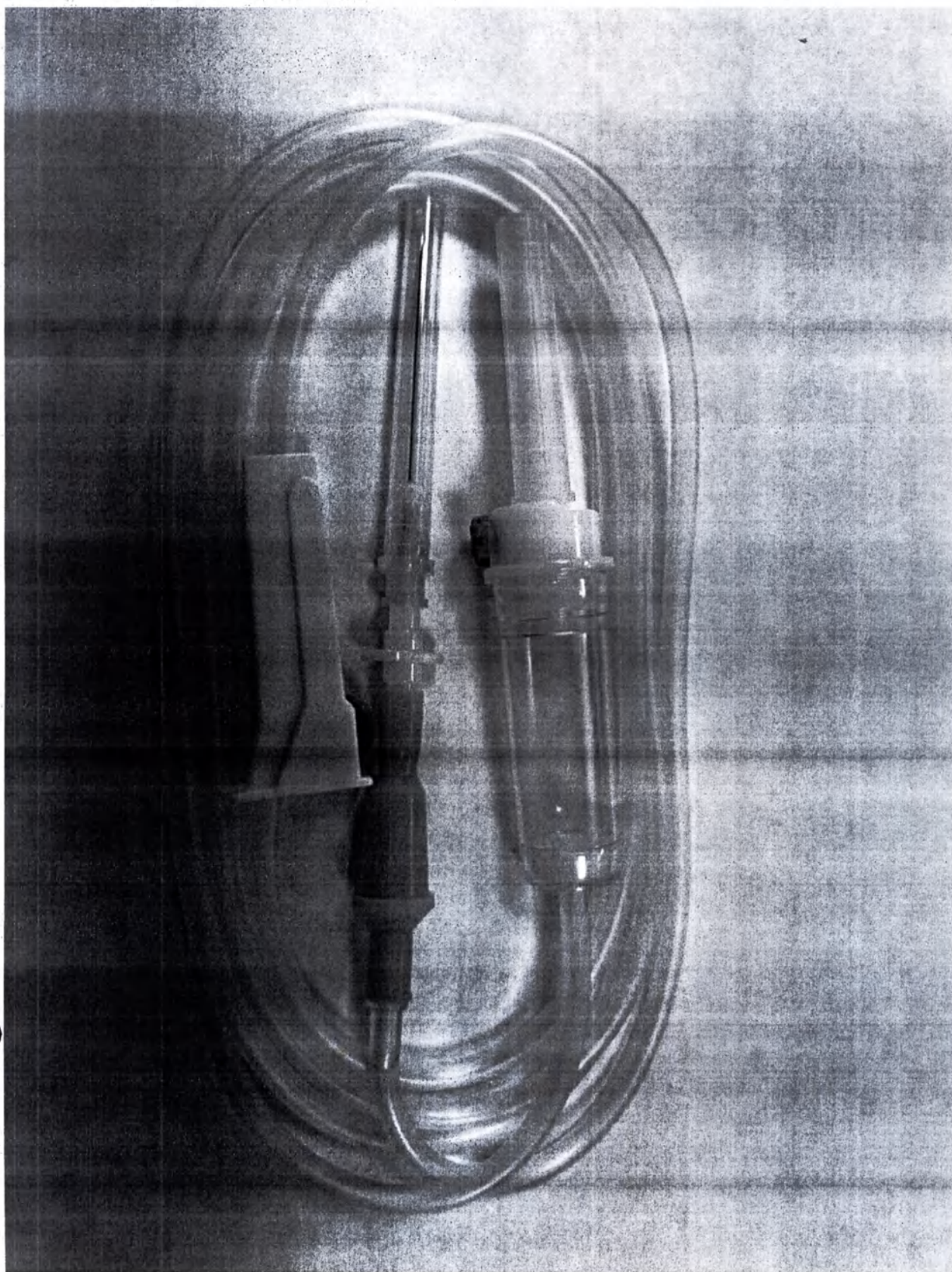

МПК Елец®

ООО Медико-Производственная
Компания «Елец»

1000 «Медико-производственная компания «Елец»
Адрес: Россия, 399774, Липецкая обл., г. Елец, Кирпичный пер., д. 27
Тел./факс: (47467) 5-19-65. E-mail: mpk-elecs@mail.ru

**УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТИЛЬНОЕ ПР 23-05-«МПК «Елец» С ИГЛОЙ ИНЪЕКЦИОННОЙ
ПО ТУ 32.50.13-017-74017482-2018**

РУ № РЗН 2019/7361 от 10.11.2022 г

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:


- вскрыть потребительскую упаковку и извлечь устройство, закрыв защитную крышку предохранительной колпачок с иглы совмещенной полимерной, двуканальной и ввести ее в шприц полимерной емкости (контейнер), или пробоу стерильной емкости.
- закрутить колпачок до появления щелчка, сдвинув его вверх.
- при использовании стерильных втулок оторвать защитную воздушную колпачок. (при введении в контейнер колпачок не оторвать)
- оторвать защитную крышку и выдвинуть устройство до полного вытекания воздуха.
- закрыть защитную крышку.

• снять предохранительный колпачок с иглы инъекционной и произвести венопункцию, оторвать защитную крышку и установить необходимую скорость потока.



ВНИМАНИЕ!

- не использовать для регистратора крови и ее компонентов.
- перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.
- однократного применения (не использовать повторно, не стерилизовать повторно).
- не применять при нарушении целостности потребительской тары.
- срок годности пять лет.
- стерильно внутри / асептично / нетоксично.
- стерильно по окислительной этикетке.
- размер иглы инъекционной 0,50x40,0 мм (20G) ТУ.

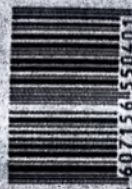


STERILE EO


Горел до 07.2023

Дата стерилизации 07.2023


Партия 75

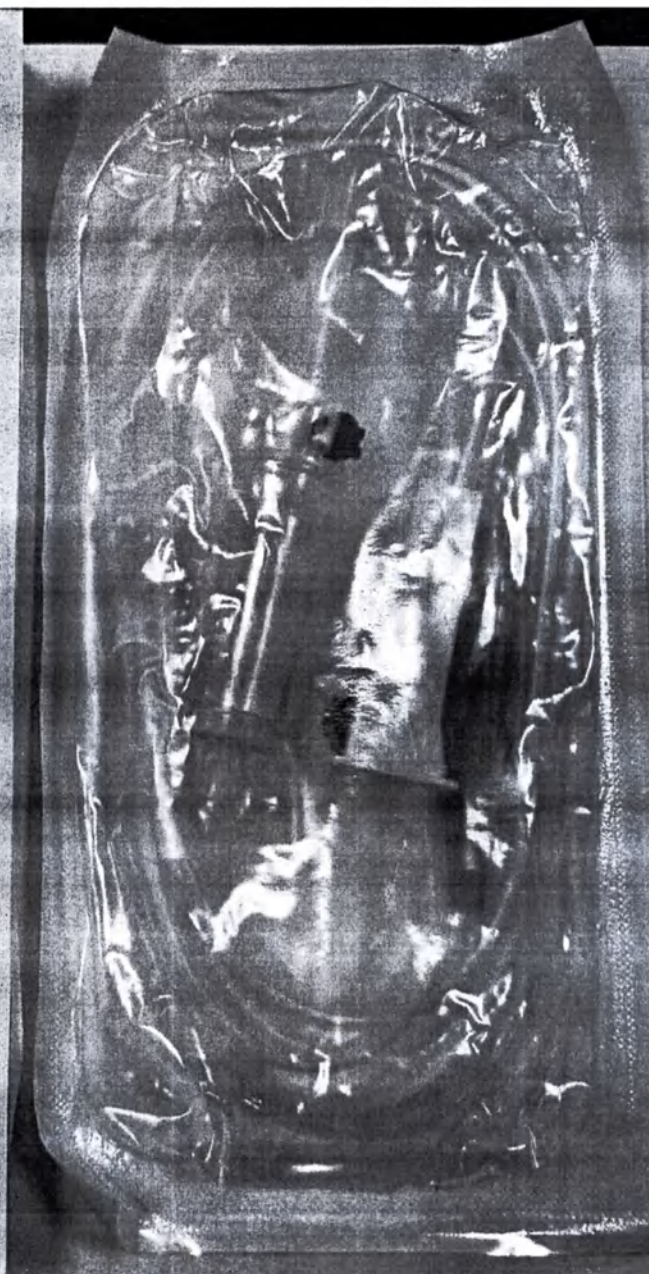


Фотография 2. Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное ПР 23-05-«МПК «Елец» с иглой инъекционной по ТУ 32.50.13-017-74017482-2018 Общий вид потребительской упаковки, маркировка.

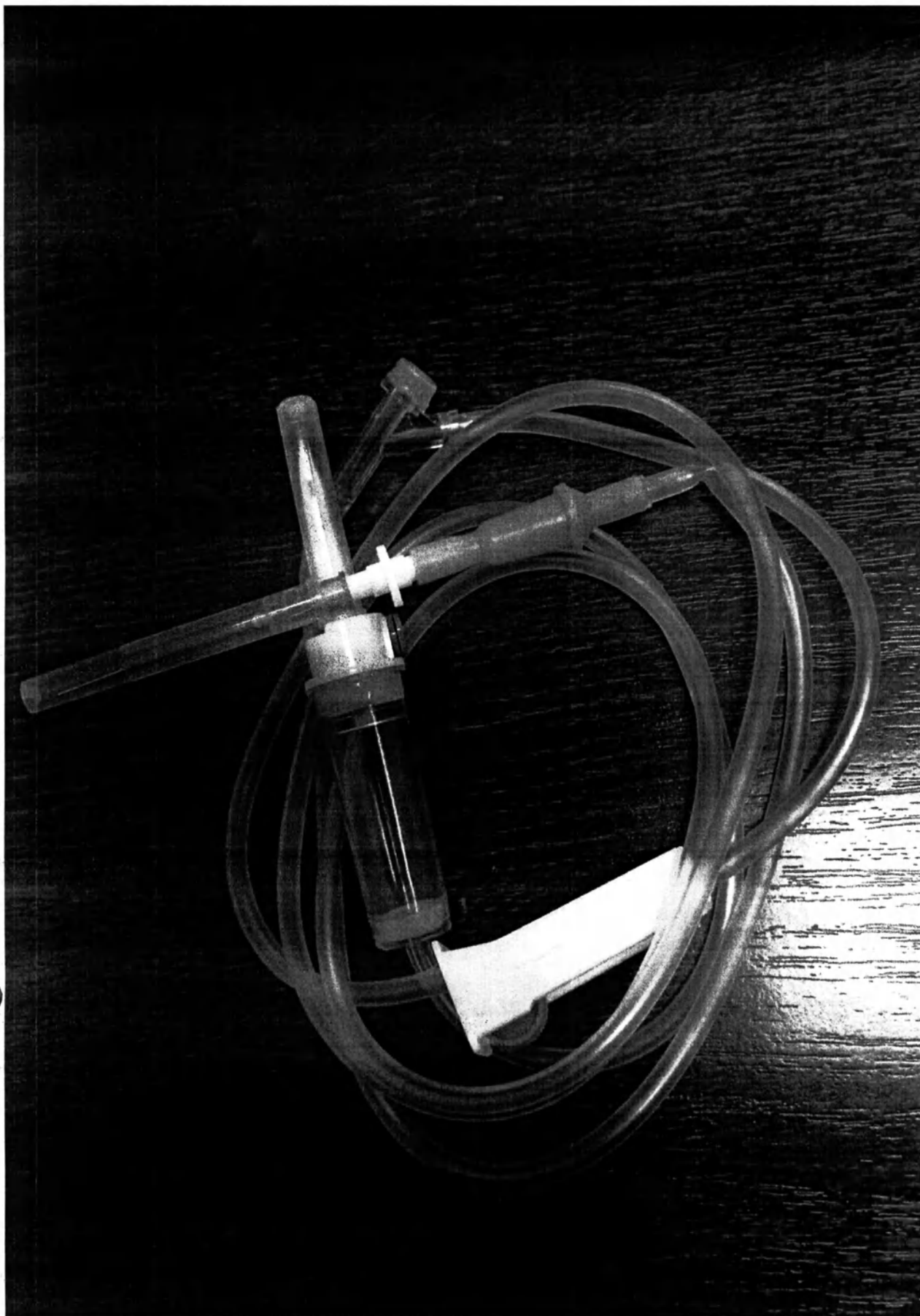

Фотография 3. Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное ПР 23-05.У-«МПК «Елец» с иглой инъекционной по ТУ 32.50.13-017-74017482-2018 Общий вид.

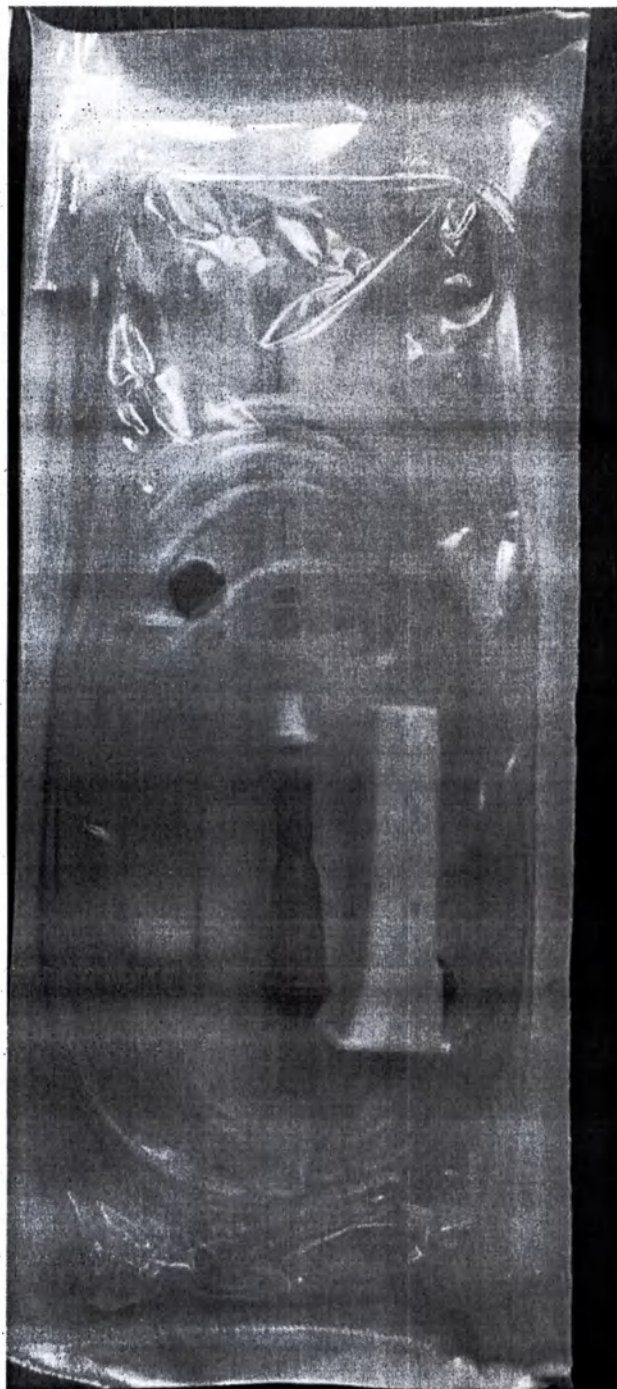

Фотография 4. Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное ПР 23-05.У-«МПК «Елец» с иглой инъекционной по ТУ 32.50.13-017-74017482-2018. Общий вид потребительской упаковки.

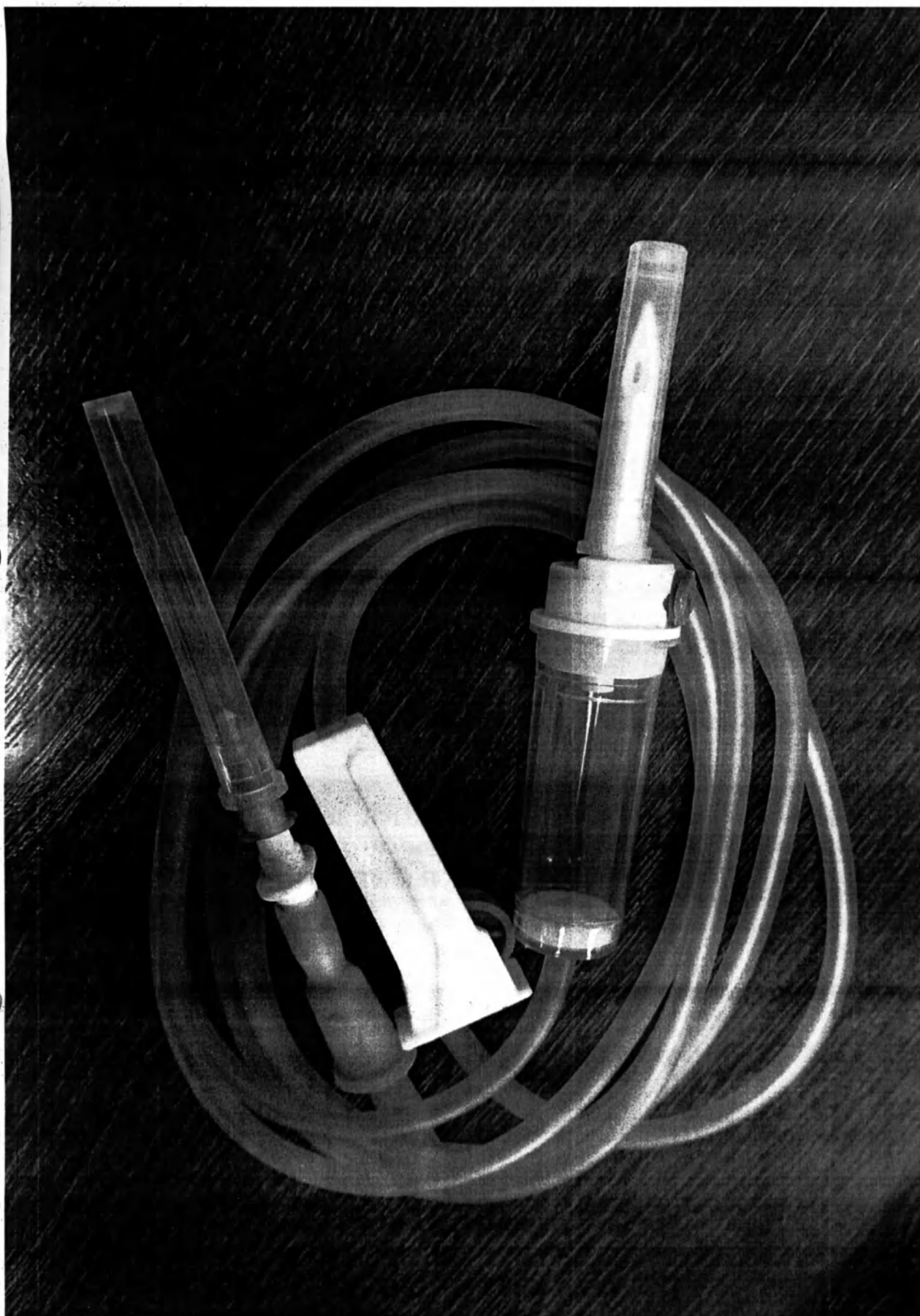

Фотография 5. Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное ПР 23-05-«МПК «Елец» светозащитное с иглой инъекционной по ТУ 32.50.13-017-74017482-2018. Общий вид.

**УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОЕ ПР 23-05-«МПК «ЕЛЕЦ» С ИГЛОЙ ИНЪЕКЦИОННОЙ
ПО ТУ 32.50.13-017-74017482-2018**

ПУ № РЗН 2018/7361 от 10.11.2022 г

ГОСТ 25047

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- вскрыть потребительскую тару и извлечь устройство. закрыть зажим.
- снять предохранительный колпачок с иглы совмещенной полимерной двуканальной и ввести ее в штатив полимерной емкости (контейнера) или пробку стеклянной бутылки.
- заполнить тарельчатому до поворота, сдвинув ее корпус.
- при использовании стерильных бутылок открыть заглушку воздушного клапана. (при вливании из контейнера клапан не открывать)
- открыть зажим и выпустить воздух, заполнив устройство до полного вытеснения воздуха.
- закрыть зажим.
- снять предохранительный колпачок с иглы инъекционной и провести венопункцию, открыть зажим и установить необходимую скорость потока.

ВНИМАНИЕ!

- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ.
- ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЗНАКОМЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
- ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ / НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО НЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПОВТОРНО
- НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ТАРЫ.
- СРОК ГОДНОСТИ ПЯТЬ ЛЕТ.
- СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ / АПИРОГЕННО / НЕТОКСИЧНО
- СТЕРИЛИЗОВАНО ОКСИДОМ ЭТИЛЕНА
- РАЗМЕР ИГЛЫ ИНЪЕКЦИОННОЙ 0,80x40,0 мм (21G) TW



Партия 75

Дата стерилизации 07.2023

Годен до 07.2028

STERILE EO

Фотография 6. Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное ПР 23-05-«МПК «Елец» с иглой инъекционной по ТУ 32.50.13-017-74017482-2018.

Изготовлено: ООО «Медико-производственная компания «Елец»
Адрес: 399774, Россия, Липецкая область, г. Елец, пер. Кирпичный, д. 27
тел.: 8 (47467) 5-19-65
E-mail: mpk-elets@mail.ru

Место производства: ООО «МПК «Елец», Россия, 399770, Липецкая область, г. Елец
Орловское ш., д.21



МПК Елец
Медико-Производственная
Компания «Елец»

**УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ
РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОЕ ПР 23-05-«МПК «ЕЛЕЦ» С
ИГЛОЙ ИНЪЕКЦИОННОЙ ПО ТУ 32.50.13-017-74017482-2018**

ПР 23-05

С ИГЛОЙ 0,80x40 мм (21G) TW

Количество - 200 шт.

Номер партии 75

Дата стерилизации 07.2023

Годен до 07.2028

Штамп ОТК 01



ТУ 32.50.13-017-74017482-2018

ПУ № РЗН 2018/7361 от 10.11.2022 г.

ГОСТ 25047

Однократного применения.

Стерильно внутри,
апирогенно, нетоксично

Хранить от +5 до +40°C.

Относительная влажность 80%
при 25°C. (верхнее значение)

Стерилизовано окисью этилена

БРУТТО 5 кг

Срок годности пять лет

Фотография 7. Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное ПР 23-05-«МПК «Елец» с иглой инъекционной по ТУ 32.50.13-017-74017482-2018.

Прошнуровано и
пронумеровано 7 (семь)

ЛИСТОВ

Генеральный директор Моисеева В.Ю.
ООО «МПК «Елец»

