

УТВЕРЖДАЮ


Генеральный директор

ООО «Окей Вижен

Технологии»

А.А. Ядыкин

07.02.2023 г.

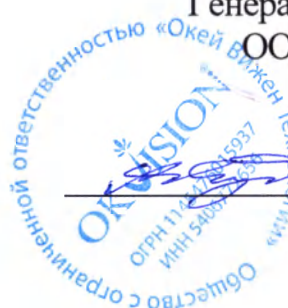

# **Инструкция по применению на медицинское изделие**

Линзы контактные мягкие корригирующие  
однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-  
2021, в вариантах исполнения

## Содержание

|                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| Наименование медицинского изделия.....                                         | 2 |
| Производитель.....                                                             | 2 |
| Состав.....                                                                    | 2 |
| Технические характеристики.....                                                | 3 |
| Область применения и назначение.....                                           | 3 |
| Показания к применению.....                                                    | 3 |
| Противопоказания к применению.....                                             | 3 |
| Способ применения.....                                                         | 4 |
| Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия.....        | 5 |
| Взаимодействие с другими средствами.....                                       | 6 |
| Форма выпуска.....                                                             | 6 |
| Комплектность.....                                                             | 6 |
| Маркировка.....                                                                | 6 |
| Основные технические и функциональные характеристики медицинского изделия..... | 8 |
| Требования к применению и эксплуатации медицинского изделия.....               | 8 |
| Срок годности.....                                                             | 8 |
| Срок ношения.....                                                              | 8 |
| Условия транспортировки и хранения.....                                        | 8 |
| Гарантийные обязательства.....                                                 | 8 |
| Порядок осуществления утилизации.....                                          | 8 |

**Наименование медицинского изделия:** Линзы контактные мягкие корригирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021, в вариантах исполнения (см. Приложение)

**Производитель:** ООО «Окей Вижен Технологии», (ООО «ОВТ»), 141981 Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Большеволжская, дом 15

**Состав:**

| Компонент          | Материал компонента  | Марка или характеристика компонента                                                                                                                            | Процентное соотношение (%) | Вид контакта с пациентом                                                        |
|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Линза              | HEMA                 | 2-Гидроксиэтилметакрилат BX-HEMA PC CAS номер: 868-77-9, производитель Bimax Inc                                                                               | 86.63                      | Со слизистыми оболочками глаза и века/ (Кратковременный контакт менее 24 часов) |
|                    | NVP                  | 1-Винил-2-пирролидон PARMON NVP, производитель NORDMANN                                                                                                        | 8.66                       |                                                                                 |
|                    | GMMA                 | Глицерилметакрилат BX-GMMA CAS номер: 5919-74-4, производитель Bimax, Inc                                                                                      | 4.33                       |                                                                                 |
|                    | EGDMA                | Этиленгликоль диметакрилат BX-EDGMA CAS номер: 97-90-5, производитель Bimax, Inc                                                                               | 0.17                       |                                                                                 |
|                    | ADV N                | 2,2-Азобис(2-метилпропионитрил) ADVN производитель Chemical Line                                                                                               | 0.13                       |                                                                                 |
|                    | Reactive Blue 4      | Reactive Blue 4 CAS номер: 13324-20-4, производитель Sigma-Aldrich                                                                                             | 0.043                      |                                                                                 |
|                    | Macromer             | Полоксамер 407 CAS номер: 9003-11-6, производитель Sigma-Aldrich                                                                                               | 0.026                      |                                                                                 |
| Раствор в блистере | NaCl (Хлорид натрия) | Натрия хлорид CAS: 7647-14-5, 0.9 % Очищенная вода, РУ №002662/01 от 12.01.2010, производитель ООО «Производственная фармацевтическая компания «Алиум», Россия | 9 г на 1000 мл             | Со слизистыми оболочками глаза и века/ (Кратковременный контакт менее 24 часов) |

Линзы не содержат лекарственные средства и материалы животного и (или) человеческого происхождения.

### Технические характеристики:

| Вариант исполнения | Задняя вершинная рефракция, дптр. | Радиус кривизны задней оптической поверхности, мм. | Диаметр, мм         | Толщина в центре, мм                       |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Сферические        | от -20.0 до -6.0 шаг 0.5          | 8,3; 8,4; 8,5; 8,6;<br>8,8                         | 14,0; 14,2;<br>14,5 | 0.08-0.25 в зависимости от оптической силы |
|                    | от -6.0 до +6.0 шаг 0.25          |                                                    |                     |                                            |
|                    | от +6.0 до +15.0 шаг 0.5          |                                                    |                     |                                            |
| Торические         | от -20.0 до -6.0 шаг 0.5          | 8,3; 8,4; 8,5; 8,6;<br>8,8                         | 14,0; 14,2;<br>14,5 | 0.08-0.25 в зависимости от оптической силы |
|                    | от -6.0 до +6.0 шаг 0.25          |                                                    |                     |                                            |
|                    | от +6.0 до +15.0 шаг 0.5          |                                                    |                     |                                            |
| Бифокальные        | от -10.0 до -6.0 шаг 0.5          | 8,3; 8,4; 8,5; 8,6;<br>8,8                         | 14,0; 14,2;<br>14,5 | 0.08-0.25 в зависимости от оптической силы |
|                    | от -6.0 до +6.0 шаг 0.25          |                                                    |                     |                                            |
|                    | от +6.0 до +10.0 шаг 0.5          |                                                    |                     |                                            |

**Область применения и назначение:** Область применения – офтальмология. Предназначены для коррекции рефракционных нарушений зрения и контроля миопии пациентов, нуждающихся в их применении по медицинским показаниям.

#### Показания к применению:

- 1) рефракционные нарушения зрения;
- 2) анизометропия разной степени;
- 3) миопии высокой степени и гиперметропия;
- 4) аметропии слабой и средней степеней;
- 5) афакия;
- 6) пресбиопии;
- 7) астигматизм;
- 8) последствия рефракционных операций.

#### Противопоказания к применению:

Нельзя использовать контактные линзы, если существует любое из следующих условий:

- 1) Острое воспаление или инфекция передней части глаза (красные или раздраженные глаза);
- 2) Любые заболевания глаз (эрозия роговицы, язва роговицы, конъюнктивит, кератит), травмы или нарушения, которые влияют на роговицу, конъюнктиву или веки;
- 3) Недостаточная слезная секреция (сухость глаз);
- 4) Пониженная чувствительность роговицы;
- 5) Аллергия на любой ингредиент, который должен использоваться для ухода за контактными линзами;
- 6) Любая активная инфекция роговицы (бактериальная, грибковая или вирусная).

### **Способ применения:**

#### **Надевание контактных линз:**

1. Тщательно вымойте руки с мылом.
2. Осторожно выньте линзу из блистера (контейнера).
3. Чтобы не путать линзы, всегда начинайте установку линз с правого глаза.
4. Осмотрите линзу и убедитесь в том, что она не повреждена (нет разрывов, она не сморщена по краям). Если линза кажется Вам поврежденной, не используйте ее. Возьмите следующую линзу из упаковки. Положите линзу на подушечку указательного пальца. Проверьте, чтобы линза не была вывернута наизнанку. Линза должна напоминать пиалу-края обращены вверх. Если линза вывернута наизнанку, то она напоминает тарелку-края вывернуты наружу.
5. Оттяните верхнее веко к брови указательным пальцем другой руки таким образом, чтобы оно не прикрывало глаз, даже если вы моргнете.
6. Положите линзу на подушечку указательного пальца правой руки и оттяните нижнее веко средним пальцем той же руки. Указательным пальцем положите на склере ниже роговицы.
7. Убедившись, что линза разместилась на глазу, осторожно уберите палец, удерживая верхнее веко, посмотрите вниз на нос для точного позиционирования линзы. Отпустите верхнее веко и поморгайте.
8. Повращайте глазами под закрытыми веками. Моргните.
9. Критерием правильного положения линзы на глазу является повышение остроты зрения.
10. Повторите все манипуляции при установке линзы на другой глаз.

#### **Снятие контактных линз:**

1. Всегда снимайте первой ту линзу, с которой начинали установку (правую).
2. При снятии линз соблюдайте те же правила гигиены, что при их надевании.
3. Для снятия линзы вы можете использовать метод щипка. Этот метод поможет Вам избежать повреждения роговицы (царапин).  
Так же, как при снятии линз, встаньте перед зеркалом, склонив голову вперед, глядя вверх, указательным пальцем сместите линзу вниз на склере.  
Осторожно снимите линзу между указательным и большим пальцами в местах, соответствующих отметкам 3-х и 9-и часов на циферблате, снимите ее и поместите в контейнер с раствором.

*Обратите внимание:*

В течение первых недель после подбора линз Ваши глаза будут адаптироваться к ним. В этот период желательно постепенно (на 30-60 мин.) увеличивать время ношения линз в течение дня. Линзы необходимо снимать на ночь.

#### **Ношение контактных линз:**

*Состояния, при которых не следует носить контактные линзы:*

- некоторые хронические заболевания организма, прием лекарственных препаратов могут вызвать непереносимость контактных линз;
- в случаях острых общих инфекционных заболеваний, а также при воспалении глаз не разрешается пользоваться линзами.

*Бассейны и открытые водоемы:*

- при посещении бассейна обязательно пользуйтесь очками для плавания;
- если вода из бассейна попала вам в глаз, рекомендуется снять контактную линзу и промыть ее универсальным раствором и только после этого надеть линзу обратно;
- не разрешается купаться в открытых пресных водоемах в контактных линзах.

*Вы должны немедленно снять линзы и обратиться к своему врачу при следующих симптомах:*

- боль в глазу, покраснение глаза, снижение остроты зрения;
- чувство жжения, зуд, дискомфорт;
- ощущение инородного тела при ношении линзы;
- необычные или более обильные выделения из глаз;
- «затуманивание» зрения, появление радужных кругов или ореолов;
- появление светобоязни;
- ощущение постоянной сухости глаза.

#### **Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия:**

Пациент должен быть проинформирован о том, что могут возникнуть следующие проблемы:

- 1) Боль в глазах;
- 2) Жжение в глазах или зуд (раздражение);
- 3) Дискомфорт, по сравнению с тем, когда линза была впервые установлена на глаз;
- 4) Ощущение чего-то в глазу (инородное тело, поцарапанная область);
- 5) Аллергическая реакция;
- 6) Чрезмерное слезотечение;
- 7) Необычные выделения из глаз;
- 8) Покраснение глаз;
- 9) Снижение остроты зрения;
- 10) Затуманенное зрение, радуга или ореолы вокруг предметов;
- 11) Чувствительность к свету (светобоязнь);
- 12) Сухие глаза;
- 13) Эрозия роговицы, язва роговицы, конъюнктивит, кератит;

Если пациент замечает что-либо из вышеперечисленного, он должен немедленно снять линзы.

**Взаимодействие с другими средствами:** Перед применением любых глазных капель всегда советуйтесь со своим специалистом по коррекции зрения. Некоторые лекарственные препараты – антигистаминные, средства от насморка, мочегонные, транквилизаторы, средства от укачивания – могут вызвать сухость глаз, ощущение присутствия линз на глазах и пелены перед глазами. При появлении таких симптомов вы должны проконсультироваться со специалистом по коррекции зрения.

**Форма выпуска:** Каждая линза упакована в индивидуальную пластиковую упаковку с маркировкой.

**Комплектность:**

Комплект поставки мягких контактных линз должен соответствовать таблице ниже.

| № | Наименование изделия     | Количество, шт. |    |
|---|--------------------------|-----------------|----|
| 1 | Линза контактная мягкая  | 10              | 30 |
| 2 | Стерильная упаковка      | 10              | 30 |
| 3 | Групповая упаковка       | 1               | 1  |
| 4 | Инструкция по применению | 1               | 1  |

**Маркировка:**


На стерильную упаковку для мягкой контактной линзы должна быть наклеена этикетка, содержащая следующие данные в соответствии с ГОСТ 31586-2012 и ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- значения параметров линзы (оптическая сила (D/SP), общий диаметр (DIA), базовая кривизна (BC), оптическая сила цилиндра (CYL/CP) (если применимо), геометрическая ось (Ax) (если применимо), значение аддидации (ADD) (если применимо);
- материал линзы;
- тип раствора, содержащегося в блистере;
- дата изготовления (в формате ГГГГ.ММ);
- срок годности (в формате ГГГГ.ММ);
- номер партии (LOT);
- обозначение стандарта ГОСТ 31586-2012.

На групповой упаковке указываются:

- товарный знак (наименование) предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- значения параметров линзы (оптическая сила (D/SP), общий диаметр (DIA), базовая кривизна (BC), оптическая сила цилиндра (CYL/CP) (если применимо), геометрическая ось (Ax) (если применимо), значение аддидации (ADD) (если применимо);
- срок годности (в формате ГГГГ.ММ);
- название материала;
- количество линз в упаковке.

# Расшифровка применяемых символов маркировки
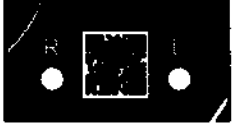
| Символ                                                                              | Обозначение                                                                          | Стерильная упаковка (Блистер) | Групповая упаковка |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|    | Изготовитель                                                                         | +                             | Не применимо       |
|    | Дата изготовления                                                                    | +                             | Не применимо       |
|    | Использовать до                                                                      | +                             | +                  |
|    | Номер партии                                                                         | +                             | +                  |
|    | Стерилизация паровым методом                                                         | +                             | +                  |
|    | Обратитесь к инструкции по применению                                                | +                             | +                  |
|    | Запрет на повторное применение                                                       | Не применимо                  | +                  |
|   | УФ-защита                                                                            | +                             | +                  |
| <b>D</b>                                                                            | Задняя вершинная рефракция                                                           | +                             | +                  |
| <b>BC</b>                                                                           | Базовая кривизна                                                                     | +                             | +                  |
| <b>DIA</b>                                                                          | Общий диаметр                                                                        | +                             | +                  |
| <b>CYL</b><br>(если применимо)                                                      | Оптическая сила цилиндра                                                             | +                             | +                  |
| <b>Ax</b><br>(если применимо)                                                       | Геометрическая ось                                                                   | +                             | +                  |
| <b>ADD</b><br>(если применимо)                                                      | Значение аддидации                                                                   | +                             | +                  |
|  | Указывает для какого глаза предназначены линзы и срок их замены (L/R = Левый/Правый) | Не применимо                  | +                  |
|  | QR код - <a href="https://okvision.ru/">https://okvision.ru/</a>                     | Не применимо                  | +                  |

**Основные технические и функциональные характеристики медицинского изделия:**

Линзы выпускаются с соблюдением международных и национальных стандартов. По биологической безопасности изделие удовлетворяет требованиям ГОСТ ISO 10993-1. Медицинское изделие нетоксично. Линзы поставляются стерильными. Стерилизация линз осуществляется методом паровой стерилизации в автоклаве. Процесс стерилизации проводится в соответствии со следующими нормами и стандартами:

ГОСТ EN 556-1-2011, ГОСТ ISO 11737-1-2012, ГОСТ Р ИСО 11138-1-2012, ГОСТ Р ИСО 11138-3-2012, ГОСТ ISO 11607-1-2018, ГОСТ ISO 11607-2-2018, ISO 13485-2017, ГОСТ ISO 11140-1-2011, ГОСТ Р ИСО 17665-1-2016.

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛИНЗЫ**, если обнаружите, что блистер открыт или поврежден.

**Требования к применению и эксплуатации медицинского изделия:**

Применять изделие рекомендуется индивидуально. Данное медицинское изделие предназначено для самостоятельного применения в домашних условиях, а также для использования в лечебно-профилактических учреждениях.

**Срок годности:** 5 лет. Не используйте после окончания срока годности, указанного на упаковке. Не храните в холодильнике и на открытом солнце.

**Срок ношения:** 1 день. Утилизируйте линзу после снятия в конце дня.

**Условия транспортировки и хранения:** Линзы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования линз должны соответствовать условиям хранения 1Л по ГОСТ 15150 (отапливаемое хранилище).

Линзы необходимо хранить при температуре от +1°C до +40°C, влажности окружающего воздуха 40-65%, избегать действия прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей.

**Гарантийные обязательства:** Данное изделие разработано, произведено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производитель гарантирует качественное изготовление продукции в соответствии с документацией и инструкциями.

**Порядок осуществления утилизации:** Изделие подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на момент утилизации. Отходы относятся к классу А - эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТКО (твёрдые коммунальные отходы), собираются в ёмкости или пакеты. Утилизируются на обычных полигонах бытового твёрдого мусора или специальных захоронениях согласно с СанПиН 2.1.3684-21.

**Перечень применяемых национальных стандартов:** Производство соответствует требованиям стандарта ГОСТ ISO 13485-2017; в отношении продукции применяются стандарты: ГОСТ 31508-2012, ГОСТ 15150-69, ГОСТ Р ИСО 14534-2013, ГОСТ 31586-2012, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ 28956-91, ГОСТ Р ИСО 13666-2009, СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ 11141-84, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ ISO 11607-1-2018, ГОСТ Р ИСО 17665-1-2016, МУ 25.1-001-86, ГОСТ 27.301-95, ГОСТ 33756-2016, ГОСТ EN 556-1-2011, ГОСТ ISO 11737-1-2012, ГОСТ Р ИСО 11138-1-2012, ГОСТ Р ИСО 11138-3-2012, ГОСТ ISO 11607-2-2018, ГОСТ ISO 14971-2021, ГОСТ ISO 11140-1-2011, ГОСТ 31588.3-2012, ГОСТ 14192-96

**П р и м е ч а н и е** – Указанные выше стандарты действуют на момент утверждения инструкции по применению. В дальнейшем, при пользовании документом, целесообразно проверить действие ссылочных

документов на текущий момент. Если ссылочный документ заменен или изменен, то при применении настоящего документа следует пользоваться замененным (измененным) документом.

По всем вопросам, включая жалобы на продукцию, обращаться в ООО «Окей Вижен Технологии»

Тел.: 8 (496) 218-10-99

E-mail: [office@okvision.ru](mailto:office@okvision.ru)

Сайт: [www.okvision.ru](http://www.okvision.ru)

Последняя версия текста: 02/2023



**Линзы контактные мягкие корригирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021, варианты исполнения:**

**1. Линзы контактные мягкие корригирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 OKVISION, в вариантах исполнения:**

**1) Линзы контактные мягкие корригирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 OKVISION сферические:**

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

**2) Линзы контактные мягкие корригирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 OKVISION торические:**

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

**3) Линзы контактные мягкие корригирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 OKVISION бифокальные:**

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

**2. Линзы контактные мягкие корригирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 ECOVISION, в вариантах исполнения:**

**1) Линзы контактные мягкие корригирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 ECOVISION сферические:**

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

**2) Линзы контактные мягкие корригирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 ECOVISION торические:**

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 ECOVISION бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 FREEDOM, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 FREEDOM сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 FREEDOM торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 FREEDOM бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

4. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 GIA, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 GIA сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 GIA торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом

0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 GIA бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

5. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 LOOK&FEEL, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 LOOK&FEEL сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 LOOK&FEEL торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 LOOK&FEEL бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

6. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 GOODLUCK, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 GOODLUCK сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 GOODLUCK торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 GOODLUCK бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

7. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 ONE TOUCH 1 DAY, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 ONE TOUCH 1 DAY сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 ONE TOUCH 1 DAY торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 ONE TOUCH 1 DAY бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

8. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 PREMIUM, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 PREMIUM сферические:

37-2021  
- 75  
-  
базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 PREMIUM торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 PREMIUM бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

9. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 PRIMA BIO, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 PRIMA BIO сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 PRIMA BIO торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 PRIMA BIO бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

10. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 PRIMA, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 PRIMA сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 PRIMA торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 PRIMA бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддциации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

11. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 SEASON, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 SEASON сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 SEASON торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 SEASON бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддциации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D,

в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

12. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 INFINITY, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 INFINITY сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 INFINITY торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 INFINITY бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

13. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 FUSION, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 FUSION сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 FUSION торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 FUSION бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

14. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 FUSION NEW, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 FUSION NEW сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 FUSION NEW торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 FUSION NEW бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

15. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 I CARE, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 I CARE сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 I CARE торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом

0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 I CARE бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

16. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 BIOTWIN, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 BIOTWIN сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 BIOTWIN торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 BIOTWIN бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

17. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 VICTORIYA, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 VICTORIYA сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 VICTORIYA торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 VICTORIYA бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

18. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 IMAVISION, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 IMAVISION сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 IMAVISION торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 IMAVISION бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

19. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 LIKONT, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 LIKONT сферические:

37-2021  
5,75

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 LIKONT торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 LIKONT бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

20. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 BIOVISION, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 BIOVISION сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 BIOVISION торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 BIOVISION бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

21. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 FRESHDEW, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 FRESHDEW сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 FRESHDEW торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 FRESHDEW бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

22. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 IQ VISION, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 IQ VISION сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 IQ VISION торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 IQ VISION бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D,

в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

23. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 NATURE VIEW, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 NATURE VIEW сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 NATURE VIEW торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 NATURE VIEW бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

24. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 CLEARWORLD, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 CLEARWORLD сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 CLEARWORLD торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 CLEARWORLD бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

25. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 ENERGYEYE, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 ENERGYEYE сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 ENERGYEYE торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 ENERGYEYE бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

26. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 NEWLOOK, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 NEWLOOK сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 NEWLOOK торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -

20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 NEWLOOK бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

27. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 MIRACLE, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 MIRACLE сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 MIRACLE торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 MIRACLE бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

28. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 Crystal Lakes, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 Crystal Lakes сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 Crystal Lakes торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 Crystal Lakes бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

29. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 OptiLook, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 OptiLook сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 OptiLook торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 OptiLook бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

30. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 AirOmoist, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 AirOmoist сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 AirOmoist торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 AirOmoist бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

31. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 Free Eyes, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 Free Eyes сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 Free Eyes торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 Free Eyes бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

32. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 BioLens, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 BioLens сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 BioLens торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 BioLens бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

33. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 ACULIFE, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 ACULIFE сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 ACULIFE торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 ACULIFE бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D,

в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

**34. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 Likont Ease 1Day, варианты исполнения:**

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 Likont Ease 1Day сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 Likont Ease 1Day торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 Likont Ease 1Day бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

**35. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 AirLens, варианты исполнения:**

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 AirLens сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 AirLens торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 AirLens бифокальные:  
базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

36. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 Biosoft, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 Biosoft сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 Biosoft торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 Biosoft бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

37. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 DINAVUE BIO, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 DINAVUE BIO сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 DINAVUE BIO торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

7737-2021  
32.50 D  
7 D,  
to

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 DINA VUE BIO бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

38. Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 Novalens, варианты исполнения:

1) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 Novalens сферические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

2) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 Novalens торические:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения цилиндра от -5,75 D до -0,75 D с шагом 0,50 D и геометрическая ось 5°-180° с шагом 5° в диапазоне оптической силы от -20,00 D до +15,00 D; оптическая сила от -20,00 D до +15,00 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D, в диапазонах от -20,00 D до -6,00 D с шагом 0,50 D и от +6,00 D до +15,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

3) Линзы контактные мягкие корректирующие однодневного ношения по ТУ 32.50.41-001-32157737-2021 Novalens бифокальные:

базовая кривизна: 8,3; 8,4; 8,5; 8,6; 8,8 мм; диаметр хорды: 14,0; 14,2; 14,5 мм; значения аддидации 2,50 D или 4,00 D в диапазоне оптической силы от -10,00 D до +10,0 D; оптическая сила от -10,00 D до +10,0 D, в диапазоне от -6,00 D до +6,00 D с шагом 0,25 D и в диапазонах от -10,00 D до -6,00 D и от +6,00 D до +10,00 D с шагом 0,50 D, в упаковках по 10 шт./30 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

Прошито, пронумеровано и скреплено  
Печатью 17 ( септисадов ) листов  
Генеральный директор  
ООО «Окей Вижен Технологии»

Ядыкин А.А.

