


Фотоизображение медицинского изделия
Питательная среда для накопления холерного вибриона «1% пептонная вода,
готовая к применению» по ТУ 20.59.52-370-78095326-2022
(два варианта фасовки)



Директор

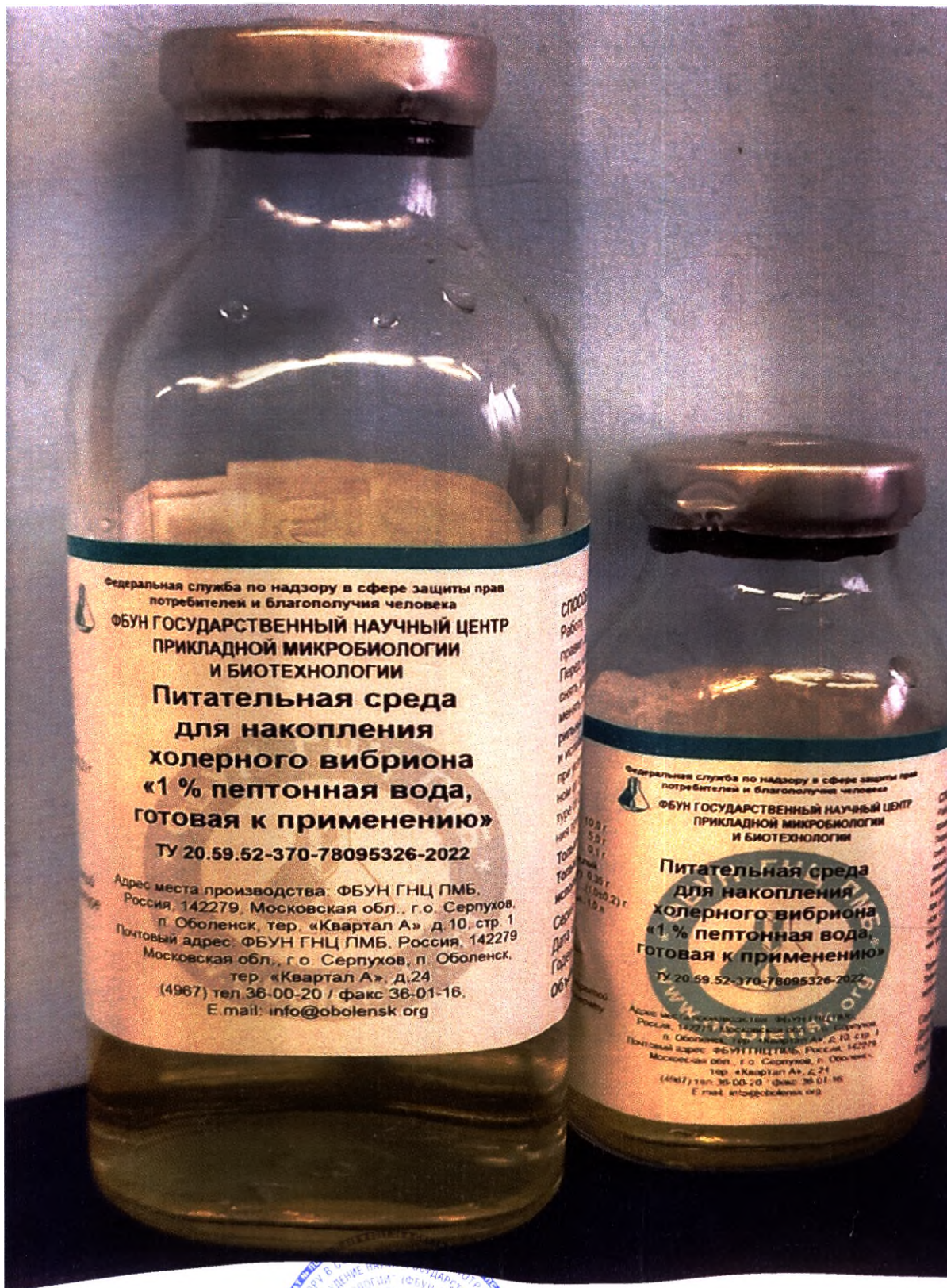

И.А.Дятлов

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора ФБУН ГНЦ ПМБ
по научно-производственной работе
А.П. Шепелин
2022 г.



МАКЕТЫ ЭТИКЕТОК (для двух видов фасовки) медицинского изделия Питательная среда для накопления холерного вибриона «1% пептонная вода, готовая к применению» по ТУ 20.59.52-370-78095326-2022»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Питательная среда для накопления холерного вибриона «1% пептонная вода, готовая к применению»
ТУ 20.59.52-370-78095326-2022

Адрес места производства: ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия, 142279, Московская обл., г.о. Серпухов, п. Оболенск, тер. «Квартал А», д.10, стр.1
Почтовый адрес: ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия, 142279, Московская обл., г.о. Серпухов, п. Оболенск, тер. «Квартал А», д.24
(4967) тел. 36-00-20 / факс 36-01-16, E-mail: info@obolensk.org

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Работу проводят с соблюдением правил асептики.
Перед началом работы с бутылок снять алюминиевые колпачки, поменять резиновые пробки на стерильные ватно-марлевые пробки и использовать в течение 7 суток при условии хранения в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °С, избегая намокания пробки.
Только для in vitro диагностики
Только для профессионального использования

Серия.....
Дата изг.....
Годен до.....
Объем..... **0,05 л**

СОСТАВ:
Пептон мясной 10,0 г
Натрий хлористый 5,0 г
Калий азотнокислый 0,1 г
Натрий пироксернистокикислый (натрия метабисульфит) 0,35 г
Натрий углекислый (1,0±0,2) г
Вода дистиллированная.. 1,0 л
рН 8,2-8,7
«Стерильно»
Хранить герметически закрытой в темном месте при температуре от 2 до 8 °С

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Питательная среда для накопления холерного вибриона «1% пептонная вода, готовая к применению»
ТУ 20.59.52-370-78095326-2022

Адрес места производства: ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия, 142279, Московская обл., г.о. Серпухов, п. Оболенск, тер. «Квартал А», д.10, стр.1
Почтовый адрес: ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия, 142279, Московская обл., г.о. Серпухов, п. Оболенск, тер. «Квартал А», д.24
(4967) тел. 36-00-20 / факс 36-01-16, E-mail: info@obolensk.org

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Работу проводят с соблюдением правил асептики.
Перед началом работы с бутылок снять алюминиевые колпачки, поменять резиновые пробки на стерильные ватно-марлевые пробки и использовать в течение 7 суток при условии хранения в защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °С, избегая намокания пробки.
Только для in vitro диагностики
Только для профессионального использования

Серия.....
Дата изготовления.....
Годен до.....
Объем..... **0,1 л**

СОСТАВ:
Пептон мясной 10,0 г
Натрий хлористый 5,0 г
Калий азотнокислый 0,1 г
Натрий пироксернистокикислый (натрия метабисульфит) 0,35 г
Натрий углекислый (1,0±0,2) г
Вода дистиллированная.. 1,0 л
рН 8,2-8,7
«Стерильно»
Хранить герметически закрытой в темном месте при температуре от 2 до 8 °С