

КОПИЯ

서울시 구로구 디지털로 31길 38-21
509호 (구로동, 이앤씨3차)
[별지 제41호서식]

디.엘.에스 DLS
법무법인

(전화) 02-6330-8660
(팩스) 02-6330-8680

Registered No. 2023 - 722

NOTARIAL CERTIFICATE

D. L. S PARTNERS

E&C Venture Dream Tower 3rd Rm#509, 38-21,


Digital-ro 31-gil, Guro-gu, Seoul, Korea



210mm X 297mm
보존용지(1종) 70g/m²

Date: 24th of February, 2022

Approved»

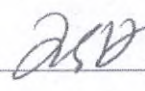

(Signature)
Heo Young Ku
CEO
"Neobiotech Co., Ltd."

Instruction for Use
for the Medical Device
Prosthetic components for dental implants Neobiotech

Version 2

1. Medical device name

Prosthetic components for dental implants Neobiotech.

I. Versions:

1. Abutment IS Link non hex type, versions: ISLKN4035NB, ISLKN4535NB – 1pc./package.
2. Abutment IS Link hex type, versions: ISLKH4035NB, ISLKH4535NB – 1pc./package.
3. Abutment IS Link type SCRP, versions: ISLKS4035NB, ISLKS4535NB – 1pc./package.
4. IS Multi Unit Abutment straight with holder, versions: ISMUA4810S, ISMUA4820S, ISMUA4830S, ISMUA4840S – 1pc./package.
5. IS Multi Unit Angled Abutment with holder, versions: ISANMUA1410S, ISANMUA1420S, ISANMUA1430S, ISANMUA1440S, ISANMUA3410S, ISANMUA3420S, ISANMUA3430S, ISANMUA3440S – 1pc./package.
6. IS Multi Unit Angled Abutment hex-type, with holder, versions: ISAHMUA1410S, ISAHMUA1420S, ISAHMUA1430S, ISAHMUA1440S, ISAHMUA3410S, ISAHMUA3420S, ISAHMUA3430S, ISAHMUA3440S – 1pc./package.
7. IS OS Abutment, versions: ISAH415O, ISAH425O, ISAH435O, ISAH445O, ISAH455O, ISAH514O, ISAH524O, ISAH534O, ISAH544O, ISAH554O, ISAH515O, ISAH525O, ISAH535O, ISAH545O, ISAH555O, ISAH517O, ISAH527O, ISAH537O, ISAH547O, ISAH557O, ISAH614O, ISAH624O, ISAH634O, ISAH644O, ISAH654O, ISAH615O, ISAH625O, ISAH635O, ISAH645O, ISAH655O, ISAH617O, ISAH627O, ISAH637O, ISAH647O, ISAH657O – 1pc./package.
8. IS Angled Abutment B-type, versions: ISAHB1427, ISAHB1437, ISAHB1447, ISAHB1527, ISAHB1537, ISAHB1547, ISAHB1627, ISAHB1637, ISAHB1647, ISAHB2427, ISAHB2437, ISAHB2447, ISAHB2527, ISAHB2537, ISAHB2547, ISAHB2627, ISAHB2637, ISAHB2647 – 1pc./package.
9. IS Angled Abutment A-type, versions: ISAHA1427, ISAHA1437, ISAHA1447, ISAHA1527, ISAHA1537, ISAHA1547, ISAHA1627, ISAHA1637, ISAHA1647, ISAHA2427, ISAHA2437, ISAHA2447, ISAHA2527, ISAHA2537, ISAHA2547, ISAHA2627, ISAHA2637, ISAHA2647 – 1pc./package.
10. IS Angled Abutment non hex type, versions: ISANA1427, ISANA1437, ISANA1447, ISANA1527, ISANA1537, ISANA1547, ISANA1627, ISANA1637, ISANA1647, ISANA2427, ISANA2437, ISANA2447, ISANA2527, ISANA2537, ISANA2547, ISANA2627, ISANA2637, ISANA2647 – 1pc./package.
11. IS Ball Abutment, versions: ISABA100, ISABA200, ISABA300, ISABA400 – 1pc./package.
12. Solid IS Abutment, versions: ISAE4140, ISAE4240, ISAE4340, ISAE4440, ISAE4540, ISAE415, ISAE425, ISAE435, ISAE445, ISAE455, ISAE417, ISAE427, ISAE437, ISAE447, ISAE457, ISAE5140, ISAE5240, ISAE5340, ISAE5440, ISAE5540, ISAE515, ISAE525, ISAE535, ISAE545, ISAE555, ISAE517, ISAE527, ISAE537, ISAE547, ISAE557, ISAE6140, ISAE6240, ISAE6340, ISAE6440, ISAE6540, ISAE615, ISAE625, ISAE635, ISAE645, ISAE655, ISAE617, ISAE627, ISAE637, ISAE647, ISAE657, ISAE7240, ISAE7340, ISAE715, ISAE725, ISAE735, ISAE745, ISAE755 – 1pc./package.
13. IS temporary abutment non hex type, versions: ISANT460, ISANT480, ISANT560, ISANT580, ISANT4130 – 1pc./package.
14. IS temporary abutment hex type, versions: ISAHT460, ISAHT480, ISAHT560, ISAHT580, ISAHT4130 – 1pc./package.

15. IS temporary abutment type SCRP, versions: ISAST460, ISAST480, ISAST4130 – 1pc./package.
16. Burn out abutment IS CCM UCLA non hex type: ISUCN400 – 1pc./package.
17. Burn out abutment IS CCM UCLA hex type: ISUCH400 – 1pc./package.
18. Burn out abutment IS CCM UCLA type SCRP: ISUCS400 – 1pc./package.
19. Plastic UCLA abutment non hex type, versions: ISUPN400, ISUPN500 – 1pc./package.
20. Plastic UCLA abutment hex type, versions: ISUPH400, ISUPH500 – 1pc./package.
21. Shapable Abutment hex-type, versions: ISSH428, ISSH448, ISSH528, ISSH548, ISSH628, ISSH648, ISSH728, ISSH748 – 1pc./package.
22. Cemented Abutment non hex-type, versions: ISAN4140, ISAN4240, ISAN4340, ISAN4440, ISAN4540, ISAN415, ISAN425, ISAN435, ISAN445, ISAN455, ISAN417, ISAN427, ISAN437, ISAN447, ISAN457, ISAN5140, ISAN5240, ISAN5340, ISAN5440, ISAN5540, ISAN515, ISAN525, ISAN535, ISAN545, ISAN555, ISAN517, ISAN527, ISAN537, ISAN547, ISAN557, ISAN6140, ISAN6240, ISAN6340, ISAN6440, ISAN6540, ISAN615, ISAN625, ISAN635, ISAN645, ISAN655, ISAN617, ISAN627, ISAN637, ISAN647, ISAN657, ISAN7140, ISAN7240, ISAN7340, ISAN7440, ISAN7540, ISAN715, ISAN725, ISAN735, ISAN745, ISAN755 – 1pc./package.
23. Cemented Abutment hex-type, versions: ISAH4140, ISAH4240, ISAH4340, ISAH4440, ISAH4540, ISAH415, ISAH425, ISAH435, ISAH445, ISAH455, ISAH417, ISAH427, ISAH437, ISAH447, ISAH457, ISAH5140, ISAH5240, ISAH5340, ISAH5440, ISAH5540, ISAH515, ISAH525, ISAH535, ISAH545, ISAH555, ISAH517, ISAH527, ISAH537, ISAH547, ISAH557, ISAH6140, ISAH6240, ISAH6340, ISAH6440, ISAH6540, ISAH615, ISAH625, ISAH635, ISAH645, ISAH655, ISAH617, ISAH627, ISAH637, ISAH647, ISAH657, ISAH7140, ISAH7240, ISAH7340, ISAH7440, ISAH7540, ISAH715, ISAH725, ISAH735, ISAH745, ISAH755 – 1pc./package.
24. Cemented Abutment type SCRP, versions: ISAS4140, ISAS4240, ISAS4340, ISAS4440, ISAS4540, ISAS415, ISAS425, ISAS435, ISAS445, ISAS455, ISAS417, ISAS427, ISAS437, ISAS447, ISAS457, ISAS5140, ISAS5240, ISAS5340, ISAS5440, ISAS5540, ISAS515, ISAS525, ISAS535, ISAS545, ISAS555, ISAS517, ISAS527, ISAS537, ISAS547, ISAS557, ISAS6140, ISAS6240, ISAS6340, ISAS6440, ISAS6540, ISAS615, ISAS625, ISAS635, ISAS645, ISAS655, ISAS617, ISAS627, ISAS637, ISAS647, ISAS657, ISAS7140, ISAS7240, ISAS7340, ISAS7440, ISAS7540, ISAS715, ISAS725, ISAS735, ISAS745, ISAS755 – 1pc./package.
25. Implant lab analog, versions: ISLA400, ISLA500, ISLA440, ISLA455, ISLA470, ISLA540, ISLA555, ISLA570, ISLA640, ISLA655, ISLA670, ISLA740, ISLA755, ISLA770, ISLA500O – 1pc./package.
26. Multi Unit lab analog: MUALA48 – 1pc./package.
27. Guide Lab Analog, versions: SGISLA400, SGISLA500 – 1pc./package.
28. Ball abutment lab analog: BALA350 – 1pc./package.
29. Titanium block IS DM Ti Block hex type, versions: ISBKH10DMD, ISBKH14DMD – 1pc./package.
30. Titanium block IS DM Ti Block non hex type: ISBKN10DMD – 1pc./package.
31. Titanium block IS OS Ti Block hex type, versions: ISBKH10OSD, ISBKH14OSD, ISBKH10OSMD – 1pc./package.
32. Titanium block IS OS Ti Block non hex type, versions: ISBKN10OSD, ISBKN10OSMD – 1pc./package.
33. Titanium block IS Ti Block hex type, versions: ISBKH10NBD, ISBKH14NBD – 1pc./package.
34. Titanium block IS Ti Block non hex type: ISBKN10NBD – 1pc./package.

35. Abutment screw, versions: ISCS20, ISCS20OS, ISCS20COS, ISCS20DM, ISAMUAS20, ISCS16OSM – 1pc./package.
36. Screw for Multi Unit Abutment Cylinder: MUAS14 – 1pc./package.
37. PickCap Impression Screw, versions: ISPCIS20, ISPCIS16, EBPCIS16, EBPCIS20, EBPCIS25 – 1pc./package.
38. Multi Unit Abutment transfer screw: MUAIPS48 – 1pc./package.
39. Impression coping screw, versions: ISPIS20, ISPISL20, ISTIS20H, ISTISL20H – 1pc./package.
40. Fixture Remover Screw, versions: FRS14, FRS16, FRS18, FRS172, FRS20, FRS25 – 1pc./package.
41. Surgical Guide Sleeve, versions: SGS55N, SGS70RW, CSGS70RW – 1pc./package.
42. IS Multi Unit angled Abutment Holder: AMUAH35 – 1pc./package.
43. PickCap Impression Cap, versions: PCISC01, PCILC01 – 1pc./package., PCISC0110S, PCILC0110S – 10 pcs./package.
44. Plastic Impression Coping Cap, versions: ISPIC411, ISPIC511, ISPIC611, ISPIC711 – 1pc./package.
45. Plastic cap, versions: ISPC410, ISPC4510, ISPC4610, ISPC4710, ISPCN410, ISPCN510, ISPCN610, ISPCN710 – 1pc./package.
46. Ball abutment clinical ring: BAORING – 3pc./package.
47. Abutment housing: BAH40 – 1pc./package.
48. IS OS Mini Link hex-type: ISLKH4035OSM – 1pc./package.
49. PickCap Impression, versions: ISPCIB3503C, ISPCIB3505C, ISPCIB3508C, ISPCIB3510C, ISPCIB4003C, ISPCIB4005C, ISPCIB4008C, ISPCIB4010C, ISPCIB403C, ISPCIB405C, ISPCIB408C, ISPCIB410C, ISOSPCI403C, ISOSPCI405C, ISSNPCI3505C, ISSNPCI3507C, ISPCIB502C, ISPCIB503C, ISPCIB504C, ISPCIB505C, ISPCIB506C, ISPCIB602C, ISPCIB603C, ISPCIB604C, ISPCIB605C, ISPCIB606C, ISPCIB702C, ISPCIB703C, ISPCIB704C, ISPCIB705C, ISPCIB706C, ISOSPCI503C, ISOSPCI505C, EBPCIBN403C, EBPCIBN405C, EBPCIBR403C, EBPCIBR405C, EBPCIBR503C, EBPCIBR505C, ITPCIB503C, ITPCIB703C – 1pc./package.
50. Impression coping hex type, versions: ISITH411O, ISITH511O, ISITH611O, ISITH411, ISITH511, ISITH611, ISITHL411, ISITHL511, ISITHL611 – 1pc./package.
51. Impression coping non hex type, versions: ISITN411, ISITN511, ISITN611, ISITNL411, ISITNL511, ISITNL611 – 1pc./package.
52. Multi Unit Abutment Impression Transfer: MUAIT48 – 1pc./package.
53. Multi Unit Abutment Impression Pick-up: MUAIP48 – 1pc./package.
54. Impression coping, versions: ISIPH411O, ISIPH511O, ISIPH611O, ISIPH400, ISIPH450, ISIPH411, ISIPH511, ISIPH611, ISIPN400, ISIPN450, ISIPN411, ISIPN511, ISIPN611, ISIPS400, ISIPS450, ISIPS411, ISIPS511, ISIPS611, ISIPHL400, ISIPHL450, ISIPHL411, ISIPHL511, ISIPHL611, ISIPNL400, ISIPNL450, ISIPNL411, ISIPNL511, ISIPNL611, ISIPSL400, ISIPSL450, ISIPSL411, ISIPSL511, ISIPSL611 – 1pc./package.
55. Ball abutment retainer: BAR20 – 1pc./package.
56. IS Titanium Cylinder non hex type, versions: ISTCAN4509, ISTCAN5509 – 1pc./package.
57. IS Titanium Cylinder hex type, versions: ISTCAH4509, ISTCAH5509 – 1pc./package.
58. Multi Unit Cylinder CCM: MUACCN48 – 1pc./package.
59. Multi Unit Cylinder temporary: MUATPCN48 – 1pc./package.

II. Instruction for use.

Hereinafter referred to as the device, abutment, transfer, components.

2. Information on the developer, manufacturer and authorized representative

Developer

«Neobiotech Co., Ltd.»

#104,24 / #102, 103, 104-1, 104-2, 105, 106, 205, 212, 306, 312, 509, 510, 511, 608, 704, 708, 710 & 10F, 36, Digital-ro 27gil, Guro-gu, Seoul, 08381, Korea

Tel: +82 2 582 2885

E-mail: info@neobiotech.com

Manufacturer

«Neobiotech Co., Ltd.»

#104,24 / #102, 103, 104-1, 104-2, 105, 106, 205, 212, 306, 312, 509, 510, 511, 608, 704, 708, 710 & 10F, 36, Digital-ro 27gil, Guro-gu, Seoul, 08381, Korea

Tel: +82 2 582 2885

E-mail: info@neobiotech.com

Manufacturing sites

«Neobiotech Co., Ltd.»

1. #104,24 / #102, 103, 104-1, 104-2, 105, 106, 205, 212, 306, 312, 509, 510, 511, 608, 704, 708, 710 & 10F, 36, Digital-ro 27gil, Guro-gu, Seoul, 08381, Korea
2. 1F, 60, Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08589, Korea

Authorized representative of the Manufacturer in the Russian Federation

GLAV DENTAL Limited Liability Company

Legal address: 127015, the Russian Federation, Moscow, Vyatskaya street, 49, building 2, E 2 Unit I office 60

Tel.: +7 (499) 652-77-10; Email: info@gl-dent.ru

3. Intended purpose of the device with indication of the potential consumer, scope of application.

3.1. Intended purpose of the device.

Products are designed for connection (retention) of implants with prosthetic restorations (single crown, bridgework or overdenture).

3.2. Potential consumers and scope of application.

Dental surgeons, maxillofacial surgeons and dental implant surgeons.

Scope of application: dental implantology, maxillofacial surgery.

4. Indications, contraindications and possible side effects associated with the use of the medical device as intended.

Indications.

It is used in dentistry for restorations with the loss of one tooth, with partial or complete loss of anterior teeth or already existing edentulism in the upper and lower jaws by means of making a relevant bone bed for the jawbone.

In bones of any density and in the following clinical situations:

- The absence of one or more teeth as well as complete adentia;
- Post-traumatic and postoperative defects of the jaw bones;

With appropriate bone characteristics (density, width and height of the bone):

- Single prosthetic dentures at the intervals from incisors to premolars.
- Bridgework on the completely and partially edentulous jaw.
- Rigid attachment of prostheses by means of dental bars and systems of ball-type fixation.

Contraindications:

- Undergoing radiation therapy to treat a malignant tumor.
- Patients with problems with jaw alignment and occlusion.
- Patients with oral infection or inflammation (inappropriate oral hygiene, bruxism, xerostomia).
- Pregnant, smoking patients, patients with mental disorders, for example, alcohol abusers, drug abusers, patients with diseases of the central and peripheral nervous system.
- Diseases of the blood and blood-forming organs or decompensated diseases of the cardiovascular system.
- Allergy to device components.
- General periodontal and surgical grounds for refusing any intervention.

Age restrictions exist only for young people under 18 years of age. This is due to the fact that they have not yet completed the growth of bone tissue and the formation of a bite.

Possible side effects:

- Complications such as malocclusion, paresthesia caused by neurological damage, infection, injury or damage to other teeth or blood vessels, edema, hypodermal bleeding, discomfort and pain, soft tissue ulcer can arise.
- Loosening of the implant screw structure, occurrence of a fracture in the implant or prosthetic.
- Bone defect around the implant and mucositis.

5. Precautions

- Consider patient condition with bone disease (osteoporosis, osteomalacia) or metabolic bone disorder in advance.
- Do not reuse devices.
- Dispose of opened devices, even if they have not been used.
- Dispose of the packaging of the used product.
- The implantation procedure can only be performed by a dentist who has undergone special training and practice. The decision on the possibility or impossibility of performing the dental implantation operation is made only by the doctor.
- The doctor must fully master the technique to be applied before the implantation. In addition, he must choose the most suitable type of implants. The wrong approach to the patient and the wrong application of methods can be the reasons for failed dental

implantation or loss of bone strength around the implants.

- Patients with excessive tooth bite force need to have an implant of sufficient thickness and length to prevent fracture of the implant.
- MR compatibility statement: This device has not been evaluated for safety and compatibility in the MR environment. It has not been tested for heating, migration, or image artifact in the MR environment. The safety of the device in the MR environment is unknown. Scanning a patient who has this device may result in patient injury.
- This product is a non-sterile medical device. It must be sterilized before use.

6. Application procedure.

Titanium block

1. Using a scanner, a digital model of the patient's oral cavity is obtained.
2. The scan data and the digital tooth model are compared with the graphic image and analyzed for optimization.
3. Based on these data, an abutment design is created using 3D computer modeling.
4. With CAM software, digital control data are created.
5. The block is installed on the CAD/CAM system equipment, after that the device is manufactured.
6. The size of the block should not be smaller than the set size, and the angle should not exceed 30 degrees (limit: diameter 4mm, cuff 1.00mm, column: below 4mm).
7. The abutment is placed on the implant with a screw or dental cement, and then retained with a 30 Ncm implant driver.

Surgical guide sleeve:

1. Prepare a 3D printed sleeve that fits the opening of the surgical guide.
2. Apply adhesive to the outer surface of the sleeve and attach it to the opening of the surgical guide.
3. After moving the dental implant guide into the patient's mouth, insert the drill into the opening of the sleeve and follow the normal dental implant procedure.

Abutments, cylinders

1. Check the state of osseointegration between bone and dental implant.
2. Select the appropriate abutment size and angle to take into account the degree of retention and anatomical conditions.
3. Select a suitable screwdriver according to the shape of the screw.
4. Before use, sterilize medical devices with high pressure steam at 132°C at least 4 minutes, drying time: 30 minutes.
5. The sterile device should be placed to the surgical tray to avoid any contact with a foreign matter.
6. Use a screwdriver of appropriate size and check the connection between abutment and screwdriver.
7. Install the device on the implant, observing the recommended tightening torque of 30Ncm. A low-speed retention is recommended for the handpiece.
8. Mark the gingival and vertical area to be removed.
9. Shape the gingiva and vertical space with a drill with sufficient irrigation.
10. Check for faults with another screwdriver.
11. Further follows orthopedic work.

Plastic UCLA abutment

1. Use in cases of restrictions due to access, cosmetic procedure or space.
2. Making an expensive prosthesis from a dental alloy (gold, base metal) after waxing.

O-ring

Insert the O-ring into the housing or retainer for use.
PickCap Impression, Impression coping, lab analogue.
Before use:

1. Before using the device, the physician must evaluate the condition, characteristics and functions of the device.
2. Use only after clearing any doubts and checking any problems with the manufacturer.
3. For the procedure, a plan must be drawn up firstly based on the condition of the patient's oral cavity and accurate medical conclusions.
4. After assessing the patient's condition, it is necessary to prepare the appropriate instruments according to the procedure.
5. Please make sure the device is installed in the correct place before use. A working model cannot be made if the laboratory analogue has been removed or modified.
6. Before use, sterilize medical devices with high pressure steam at 132°C at least 4 minutes, drying time: 30 minutes. Do not sterilize the lab analogue and plastic crowns!

At the implant level:

1. After attaching the impression coping to the implant, attach the screw using a hex screwdriver. After that, check with an x-ray and then take an impression.
2. Separate the body of the impression and connect the laboratory analogue to the impression coping.
3. Enter material to recreate tissue.
4. Place the impression in the container and inject the plaster to complete the model.
5. Attach the abutment to the finished working cast and adjust the height and other specifications before making the crown from the modeling resin.
6. After waxing, make the final crown.

At the abutment level:

1. Take an impression by attaching the impression cap to the abutment with one touch.
2. Separate the body of the impression and connect the laboratory analogue to the impression cap.
3. Enter material to recreate tissue.
4. Place the impression in the container and inject the plaster to complete the model.
5. Attach the abutment to the finished working cast and adjust the height and other specifications before making the crown from the modeling resin.
6. After waxing, make the final crown.

7. Description of the device, principle of operation and characteristics of the medical device.

General description.

The devices are the upper parts of dental implant systems EB, IS, IT, and the system CCM cylinder-implant, made from various raw materials. Abutment, screws, etc. are used as a base or a support for restoration after the implant substructure has been placed. Cementing or screw retention is used as a technique for attaching the abutment and prosthesis retainers. The design of the abutment interface elements corresponds to that of the implants for the exact fit and the easy "implant-abutment" connection.

Connection.


Connection of IS

Hex type


Non-hex type

Instruction for Use for the Medical Device (version 2):
Prosthetic components for dental implants Neobiotech


Шестигранный

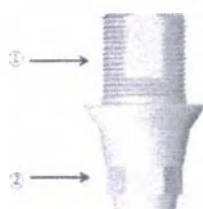

Не шестигранный

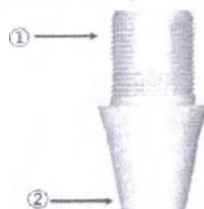

SCRП

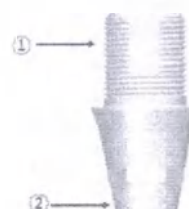

① The prosthesis is cemented to a cross-sectional abutment to prevent rotation of the prosthesis. Has a convex and concave shape to expand the adhesive surface.


② Hex type: This type has a hexagonal design that can be connected to the implant.

Non-hex type: This type has a non-hexagonal design that can be connected to the implant.


SCRП: this type has a SCRП (Screw & Cement Retained Prosthesis) structure that can be connected to the implant.

Connection of IS OS

Hex type

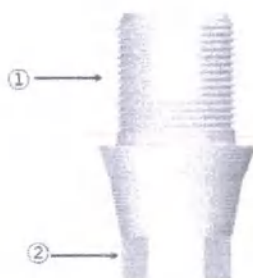

Non-hex type

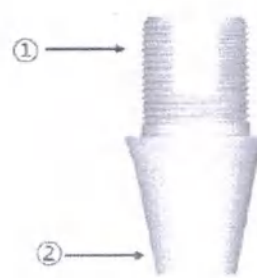


① The prosthesis is cemented to a cross-sectional abutment to prevent rotation of the prosthesis. Has a convex and concave shape to expand the adhesive surface.

② Hex type: This type has a hexagonal design that can be connected to the implant.


Non-hex type: This type has a non-hexagonal design that can be connected to the implant.

Connection of IS DM

Hex type

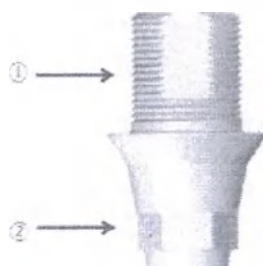

Non-hex type

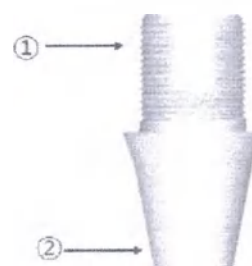

① The prosthesis is cemented to a cross-sectional abutment to prevent rotation of the prosthesis. Has a convex and concave shape to expand the adhesive surface.

② Hex type: This type has a hexagonal design that can be connected to the implant.

Page 9 of 51

Non-hex type: This type has a non-hexagonal design that can be connected to the implant.

8. Main dimensions.



8.1. Solid IS Abutment: ISAE4140, ISAE4240, ISAE4340, ISAE4440, ISAE4540, ISAE415, ISAE425, ISAE435, ISAE445, ISAE455, ISAE417, ISAE427, ISAE437, ISAE447, ISAE457, ISAE5140, ISAE5240, ISAE5340, ISAE5440, ISAE5540, ISAE515, ISAE525, ISAE535, ISAE545, ISAE555, ISAE517, ISAE527, ISAE537, ISAE547, ISAE557, ISAE6140, ISAE6240, ISAE6340, ISAE6440, ISAE6540, ISAE615, ISAE625, ISAE635, ISAE645, ISAE655, ISAE617, ISAE627, ISAE637, ISAE647, ISAE657, ISAE7240, ISAE7340, ISAE715, ISAE725, ISAE735, ISAE745, ISAE755.

Table 1. Solid IS Abutment: dimensions

No.	Item No.	Dimensions, mm			
		Ø max	Length	Length of a crown part	Carving Ø
1.	ISAE4140	4.5	11.1	4.0	1.95
2.	ISAE4240	4.5	12.1	4.0	1.95
3.	ISAE4340	4.5	13.1	4.0	1.95
4.	ISAE4440	4.5	14.1	4.0	1.95
5.	ISAE4540	4.5	15.1	4.0	1.95
6.	ISAE415	4.5	12.6	5.5	1.95
7.	ISAE425	4.5	13.6	5.5	1.95
8.	ISAE435	4.5	14.6	5.5	1.95
9.	ISAE445	4.5	15.6	5.5	1.95
10.	ISAE455	4.5	16.6	5.5	1.95
11.	ISAE417	4.5	14.1	7.0	1.95
12.	ISAE427	4.5	15.1	7.0	1.95
13.	ISAE437	4.5	16.1	7.0	1.95
14.	ISAE447	4.5	17.1	7.0	1.95
15.	ISAE457	4.5	18.1	7.0	1.95
16.	ISAE5140	5.2	11.1	4.0	1.95
17.	ISAE5240	5.2	12.1	4.0	1.95
18.	ISAE5340	5.2	13.1	4.0	1.95
19.	ISAE5440	5.2	14.1	4.0	1.95
20.	ISAE5540	5.2	15.1	4.0	1.95
21.	ISAE515	5.2	12.6	5.5	1.95
22.	ISAE525	5.2	13.6	5.5	1.95
23.	ISAE535	5.2	14.6	5.5	1.95
24.	ISAE545	5.2	15.6	5.5	1.95
25.	ISAE555	5.2	16.6	5.5	1.95
26.	ISAE517	5.2	14.1	7.0	1.95
27.	ISAE527	5.2	15.1	7.0	1.95
28.	ISAE537	5.2	16.1	7.0	1.95
29.	ISAE547	5.2	17.1	7.0	1.95

30.	ISAE557	5.2	18.1	7.0	1.95
31.	ISAE6140	5.7	11.1	4.0	1.95
32.	ISAE6240	5.7	12.1	4.0	1.95
33.	ISAE6340	5.7	13.1	4.0	1.95
34.	ISAE6440	5.7	14.1	4.0	1.95
35.	ISAE6540	5.7	15.1	4.0	1.95
36.	ISAE615	5.7	12.6	5.5	1.95
37.	ISAE625	5.7	13.6	5.5	1.95
38.	ISAE635	5.7	14.6	5.5	1.95
39.	ISAE645	5.7	15.6	5.5	1.95
40.	ISAE655	5.7	16.6	5.5	1.95
41.	ISAE617	5.7	14.1	7.0	1.95
42.	ISAE627	5.7	15.1	7.0	1.95
43.	ISAE637	5.7	16.1	7.0	1.95
44.	ISAE647	5.7	17.1	7.0	1.95
45.	ISAE657	5.7	18.1	7.0	1.95
46.	ISAE7240	6.5	12.1	4.0	1.95
47.	ISAE7340	6.5	13.1	4.0	1.95
48.	ISAE715	6.5	12.6	5.5	1.95
49.	ISAE725	6.5	13.6	5.5	1.95
50.	ISAE735	6.5	14.6	5.5	1.95
51.	ISAE745	6.5	15.6	5.5	1.95
52.	ISAE755	6.5	16.6	5.5	1.95

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.2.IS Multi Unit Abutment straight with holder: ISMUA4810S, ISMUA4820S, ISMUA4830S, ISMUA4840S.

Table 2. IS Multi Unit Abutment straight with holder: dimensions

No.	Item No.	Dimensions, mm			
		Ø max	Carving Ø	Length	Hex Ø
1.	ISMUA4810S	4.8	1.95	9.7	2.0
2.	ISMUA4820S	4.8	1.95	10.7	2.0
3.	ISMUA4830S	4.8	1.95	11.7	2.0
4.	ISMUA4840S	4.8	1.95	12.7	2.0

* - Tolerance max. $\pm 1\%$

Holder of IS Multi Unit Abutment straight.

Table 3. Holder of IS Multi Unit Abutment straight: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Length	Ø1	Ø2
1.	MUAH48	20.0	6.0	4.8



8.3. IS Multi Unit Angled Abutment hex-type, with holder : ISAHMUA 1410S, ISAHMUA1420S, ISAHMUA1430S, ISAHMUA1440S, ISAHMUA3410S, ISAHMUA3420S, ISAHMUA3430S, ISAHMUA 3440S.

Table 4. IS Multi Unit Angled Abutment hex-type, with holder: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm					
		Platform Ø	Ø max	Angled part length	Angle (°)	Length	F
1	ISAHMUA1410S**	3.43	4.8	1.0	17	7.14	2.5
2	ISAHMUA1420S**	3.43	4.8	2.0	17	8.14	2.5
3	ISAHMUA1430S**	3.43	4.8	3.0	17	9.14	2.5
4	ISAHMUA1440S**	3.43	4.8	4.0	17	10.14	2.5
5	ISAHMUA3410S**	3.43	4.8	1.0	30	7.69	2.5
6	ISAHMUA3420S**	3.43	4.8	2.0	30	8.69	2.5
7	ISAHMUA3430S**	3.43	4.8	3.0	30	9.69	2.5
8	ISAHMUA3440S**	3.43	4.8	4.0	30	10.69	2.5

* - Tolerance max $\pm 1\%$

** -should be used with the screw ISAMUAS20

Holder of IS Multi Unit Angled Abutment hex-type.

Table 5. Holder of IS Multi Unit Angled Abutment hex-type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Length	Ø1	Ø2
1	AMUAH35	22.0	3.5	1.25



8.4. IS Multi Unit Angled Abutment, with holder: ISANMUA1410S, ISANMUA1420S, ISANMUA1430S, ISANMUA1440S, ISANMUA3410S, ISANMUA3420S, ISANMUA3430S, ISANMUA3440S.

Table 6. IS Multi Unit Angled Abutment, with holder: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm				
		Platform Ø	Ø max.	Length of the angled part	Angle (°)	Length
1	ISANMUA1410S**	3.43	4.8	1.0	17	7.14
2	ISANMUA1420S***	3.43	4.8	2.0	17	8.14
3	ISANMUA1430S**	3.43	4.8	3.0	17	9.14
4	ISANMUA1440S**	3.43	4.8	4.0	17	10.14
5	ISANMUA3410S**	3.43	4.8	1.0	30	7.69
6	ISANMUA3420S**	3.43	4.8	2.0	30	8.69
7	ISANMUA3430S**	3.43	4.8	3.0	30	9.69
8	ISANMUA3440S**	3.43	4.8	4.0	30	10.69

* - Tolerance max. $\pm 1\%$

** - should be used with the ISAMUAS20 screw





8.5. Multi Unit Cylinder temporary: MUATPCN48.

Table 7. Multi Unit Cylinder temporary: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø max.	Length of a crown part	Length
1	MUATPCN48	4.8	3.0	11.0

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.6. Multi Unit Cylinder CCM: MUACCN48.

Table 8. Multi Unit Cylinder CCM: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø max.	Length	Length of a burn out part
1	MUACCN48	4.8	11.0	9.0

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.7. Screw for Multi Unit Abutment Cylinder: MUAS14.

Table 9. Screw for Multi Unit Abutment Cylinder: MUAS14: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø max.	Length	Carving Ø
1	MUAS14	2.3	4.1	1.35



8.8.IS OS Abutment: ISAH415O, ISAH425O, ISAH435O, ISAH445O, ISAH455O, ISAH514O, ISAH524O, ISAH534O, ISAH544O, ISAH554O, ISAH515O, ISAH525O, ISAH535O, ISAH545O, ISAH555O, ISAH517O, ISAH527O, ISAH537O, ISAH547O, ISAH557O, ISAH614O, ISAH624O, ISAH634O, ISAH644O, ISAH654O, ISAH615O, ISAH625O, ISAH635O, ISAH645O, ISAH655O, ISAH617O, ISAH627O, ISAH637O, ISAH647O, ISAH657O.

Table 10. IS OS Abutment: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			
		Ø max.	Length of a crown part	Length	Hex Ø
1.	ISAH415O	4.5	5.5	9.0	2.48
2.	ISAH425O	4.5	5.5	10.0	2.48
3.	ISAH435O	4.5	5.5	11.0	2.48
4.	ISAH445O	4.5	5.5	12.0	2.48
5.	ISAH455O	4.5	5.5	13.0	2.48
6.	ISAH514O	5.2	4.5	8.0	2.48
7.	ISAH524O	5.2	4.5	9.0	2.48
8.	ISAH534O	5.2	4.5	10.0	2.48
9.	ISAH544O	5.2	4.5	11.0	2.48
10.	ISAH554O	5.2	4.5	12.0	2.48
11.	ISAH515O	5.2	5.5	9.0	2.48
12.	ISAH525O	5.2	5.5	10.0	2.48
13.	ISAH535O	5.2	5.5	11.0	2.48
14.	ISAH545O	5.2	5.5	12.0	2.48
15.	ISAH555O	5.2	5.5	13.0	2.48
16.	ISAH517O	5.2	7.0	10.5	2.48
17.	ISAH527O	5.2	7.0	11.5	2.48
18.	ISAH537O	5.2	7.0	12.5	2.48
19.	ISAH547O	5.2	7.0	13.5	2.48
20.	ISAH557O	5.2	7.0	14.5	2.48
21.	ISAH614O	5.7	4.5	8.0	2.48
22.	ISAH624O	5.7	4.5	9.0	2.48
23.	ISAH634O	5.7	4.5	10.0	2.48
24.	ISAH644O	5.7	4.5	11.0	2.48
25.	ISAH654O	5.7	4.5	12.0	2.48
26.	ISAH615O	5.7	5.5	9.0	2.48
27.	ISAH625O	5.7	5.5	10.0	2.48
28.	ISAH635O	5.7	5.5	11.0	2.48
29.	ISAH645O	5.7	5.5	12.0	2.48
30.	ISAH655O	5.7	5.5	13.0	2.48
31.	ISAH617O	5.7	7.0	10.5	2.48
32.	ISAH627O	5.7	7.0	11.5	2.48

33.	ISAH637O	5.7	7.0	12.5	2.48
34.	ISAH647O	5.7	7.0	13.5	2.48
35.	ISAH657O	5.7	7.0	14.5	2.48

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.9.Cemented Abutment hex-type: ISAH4140, ISAH4240, ISAH4340, ISAH4440, ISAH4540, ISAH415, ISAH425, ISAH435, ISAH445, ISAH455, ISAH417, ISAH427, ISAH437, ISAH447, ISAH457, ISAH5140, ISAH5240, ISAH5340, ISAH5440, ISAH5540, ISAH515, ISAH525, ISAH535, ISAH545, ISAH555, ISAH517, ISAH527, ISAH537, ISAH547, ISAH557, ISAH6140, ISAH6240, ISAH6340, ISAH6440, ISAH6540, ISAH615, ISAH625, ISAH635, ISAH645, ISAH655, ISAH617, ISAH627, ISAH637, ISAH647, ISAH657, ISAH7140, ISAH7240, ISAH7340, ISAH7440, ISAH7540, ISAH715, ISAH725, ISAH735, ISAH745, ISAH755.

Table 11. Cemented Abutment hex-type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			
		Ø max	Length	Length of a crown part	Hex Ø
1	ISAH4140	4.5	8.0	4.0	2.5
2	ISAH4240	4.5	9.0	4.0	2.5
3	ISAH4340	4.5	10.0	4.0	2.5
4	ISAH4440	4.5	11.0	4.0	2.5
5	ISAH4540	4.5	12.0	4.0	2.5
6	ISAH415	4.5	9.5	5.5	2.5
7	ISAH425	4.5	10.5	5.5	2.5
8	ISAH435	4.5	11.5	5.5	2.5
9	ISAH445	4.5	12.5	5.5	2.5
10	ISAH455	4.5	13.5	5.5	2.5
11	ISAH417	4.5	11.0	7.0	2.5
12	ISAH427	4.5	12.0	7.0	2.5
13	ISAH437	4.5	13.0	7.0	2.5
14	ISAH447	4.5	14.0	7.0	2.5
15	ISAH457	4.5	15.0	7.0	2.5
16	ISAH5140	5.2	8.0	4.0	2.5
17	ISAH5240	5.2	9.0	4.0	2.5
18	ISAH5340	5.2	10.0	4.0	2.5
19	ISAH5440	5.2	11.0	4.0	2.5
20	ISAH5540	5.2	12.0	4.0	2.5
21	ISAH515	5.2	9.5	5.5	2.5
22	ISAH525	5.2	10.5	5.5	2.5
23	ISAH535	5.2	11.5	5.5	2.5
24	ISAH545	5.2	12.5	5.5	2.5
25	ISAH555	5.2	13.5	5.5	2.5
26	ISAH517	5.2	11.0	7.0	2.5

27	ISAH527	5.2	12.0	7.0	2.5
28	ISAH537	5.2	13.0	7.0	2.5
29	ISAH547	5.2	14.0	7.0	2.5
30	ISAH557	5.2	15.0	7.0	2.5
31	ISAH6140	5.7	8.0	4.0	2.5
32	ISAH6240	5.7	9.0	4.0	2.5
33	ISAH6340	5.7	10.0	4.0	2.5
34	ISAH6440	5.7	11.0	4.0	2.5
35	ISAH6540	5.7	12.0	4.0	2.5
36	ISAH615	5.7	9.5	5.5	2.5
37	ISAH625	5.7	10.5	5.5	2.5
38	ISAH635	5.7	11.5	5.5	2.5
39	ISAH645	5.7	12.5	5.5	2.5
40	ISAH655	5.7	13.5	5.5	2.5
41	ISAH617	5.7	11.0	7.0	2.5
42	ISAH627	5.7	12.0	7.0	2.5
43	ISAH637	5.7	13.0	7.0	2.5
44	ISAH647	5.7	14.0	7.0	2.5
45	ISAH657	5.7	15.0	7.0	2.5
46	ISAH7140	6.5	8.0	4.0	2.5
47	ISAH7240	6.5	9.0	4.0	2.5
48	ISAH7340	6.5	10.0	4.0	2.5
49	ISAH7440	6.5	11.0	4.0	2.5
50	ISAH7540	6.5	12.0	4.0	2.5
51	ISAH715	6.5	9.5	5.5	2.5
52	ISAH725	6.5	10.5	5.5	2.5
53	ISAH735	6.5	11.5	5.5	2.5
54	ISAH745	6.5	12.5	5.5	2.5
55	ISAH755	6.5	13.5	5.5	2.5

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.10. Cemented Abutment non hex type: ISAN4140, ISAN4240, ISAN4340, ISAN4440, ISAN4540, ISAN415, ISAN425, ISAN435, ISAN445, ISAN455, ISAN417, ISAN427, ISAN437, ISAN447, ISAN457, ISAN5140, ISAN5240, ISAN5340, ISAN5440, ISAN5540, ISAN515, ISAN525, ISAN535, ISAN545, ISAN555, ISAN517, ISAN527, ISAN537, ISAN547, ISAN557, ISAN6140, ISAN6240, ISAN6340, ISAN6440, ISAN6540, ISAN615, ISAN625, ISAN635, ISAN645, ISAN655, ISAN617, ISAN627, ISAN637, ISAN647, ISAN657, ISAN7140, ISAN7240, ISAN7340, ISAN7440, ISAN7540, ISAN715, ISAN725, ISAN735, ISAN745, ISAN755.

Table 12. Cemented Abutment non hex type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ømax	Length	Length of a crown part
1.	ISAN4140	4.5	8.0	4.0
2.	ISAN4240	4.5	9.0	4.0
3.	ISAN4340	4.5	10.0	4.0
4.	ISAN4440	4.5	11.0	4.0
5.	ISAN4540	4.5	12.0	4.0
6.	ISAN415	4.5	9.5	5.5
7.	ISAN425	4.5	10.5	5.5
8.	ISAN435	4.5	11.5	5.5
9.	ISAN445	4.5	12.5	5.5
10.	ISAN455	4.5	13.5	5.5
11.	ISAN417	4.5	11.0	7.0
12.	ISAN427	4.5	12.0	7.0
13.	ISAN437	4.5	13.0	7.0
14.	ISAN447	4.5	14.0	7.0
15.	ISAN457	4.5	15.0	7.0
16.	ISAN5140	5.2	8.0	4.0
17.	ISAN5240	5.2	9.0	4.0
18.	ISAN5340	5.2	10.0	4.0
19.	ISAN5440	5.2	11.0	4.0
20.	ISAN5540	5.2	12.0	4.0
21.	ISAN515	5.2	9.5	5.5
22.	ISAN525	5.2	10.5	5.5
23.	ISAN535	5.2	11.5	5.5
24.	ISAN545	5.2	12.5	5.5
25.	ISAN555	5.2	13.5	5.5
26.	ISAN517	5.2	11.0	7.0
27.	ISAN527	5.2	12.0	7.0
28.	ISAN537	5.2	13.0	7.0
29.	ISAN547	5.2	14.0	7.0
30.	ISAN557	5.2	15.0	7.0
31.	ISAN6140	5.7	8.0	4.0
32.	ISAN6240	5.7	9.0	4.0
33.	ISAN6340	5.7	10.0	4.0
34.	ISAN6440	5.7	11.0	4.0
35.	ISAN6540	5.7	12.0	4.0
36.	ISAN615	5.7	9.5	5.5
37.	ISAN625	5.7	10.5	5.5
38.	ISAN635	5.7	11.5	5.5
39.	ISAN645	5.7	12.5	5.5
40.	ISAN655	5.7	13.5	5.5
41.	ISAN617	5.7	11.0	7.0
42.	ISAN627	5.7	12.0	7.0
43.	ISAN637	5.7	13.0	7.0
44.	ISAN647	5.7	14.0	7.0

45.	ISAN657	5.7	15.0	7.0
46.	ISAN7140	6.5	8.0	4.0
47.	ISAN7240	6.5	9.0	4.0
48.	ISAN7340	6.5	10.0	4.0
49.	ISAN7440	6.5	11.0	4.0
50.	ISAN7540	6.5	12.0	4.0
51.	ISAN715	6.5	9.5	5.5
52.	ISAN725	6.5	10.5	5.5
53.	ISAN735	6.5	11.5	5.5
54.	ISAN745	6.5	12.5	5.5
55.	ISAN755	6.5	13.5	5.5

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.11.Cemented Abutment type SCRP: ISAS4140, ISAS4240, ISAS4340, ISAS4440, ISAS4540, ISAS415, ISAS425, ISAS435, ISAS445, ISAS455, ISAS417, ISAS427, ISAS437, ISAS447, ISAS457, ISAS5140, ISAS5240, ISAS5340, ISAS5440, ISAS5540, ISAS515, ISAS525, ISAS535, ISAS545, ISAS555, ISAS517, ISAS527, ISAS537, ISAS547, ISAS557, ISAS6140, ISAS6240, ISAS6340, ISAS6440, ISAS6540, ISAS615, ISAS625, ISAS635, ISAS645, ISAS655, ISAS617, ISAS627, ISAS637, ISAS647, ISAS657, ISAS7140, ISAS7240, ISAS7340, ISAS7440, ISAS7540, ISAS715, ISAS725, ISAS735, ISAS745, ISAS755.

Table 13. Cemented Abutment type SCRP: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			
		Ø max	Length	Length of a crown part	Hex Ø
1.	ISAS4140	4.5	8.0	4.0	2.5
2.	ISAS4240	4.5	9.0	4.0	2.5
3.	ISAS4340	4.5	10.0	4.0	2.5
4.	ISAS4440	4.5	11.0	4.0	2.5
5.	ISAS4540	4.5	12.0	4.0	2.5
6.	ISAS415	4.5	9.5	5.5	2.5
7.	ISAS425	4.5	10.5	5.5	2.5
8.	ISAS435	4.5	11.5	5.5	2.5
9.	ISAS445	4.5	12.5	5.5	2.5
10.	ISAS455	4.5	13.5	5.5	2.5
11.	ISAS417	4.5	11.0	7.0	2.5
12.	ISAS427	4.5	12.0	7.0	2.5
13.	ISAS437	4.5	13.0	7.0	2.5
14.	ISAS447	4.5	14.0	7.0	2.5
15.	ISAS457	4.5	15.0	7.0	2.5
16.	ISAS5140	5.2	8.0	4.0	2.5
17.	ISAS5240	5.2	9.0	4.0	2.5
18.	ISAS5340	5.2	10.0	4.0	2.5

19.	ISAS5440	5.2	11.0	4.0	2.5
20.	ISAS5540	5.2	12.0	4.0	2.5
21.	ISAS515	5.2	9.5	5.5	2.5
22.	ISAS525	5.2	10.5	5.5	2.5
23.	ISAS535	5.2	11.5	5.5	2.5
24.	ISAS545	5.2	12.5	5.5	2.5
25.	ISAS555	5.2	13.5	5.5	2.5
26.	ISAS517	5.2	11.0	7.0	2.5
27.	ISAS527	5.2	12.0	7.0	2.5
28.	ISAS537	5.2	13.0	7.0	2.5
29.	ISAS547	5.2	14.0	7.0	2.5
30.	ISAS557	5.2	15.0	7.0	2.5
31.	ISAS6140	5.7	8.0	4.0	2.5
32.	ISAS6240	5.7	9.0	4.0	2.5
33.	ISAS6340	5.7	10.0	4.0	2.5
34.	ISAS6440	5.7	11.0	4.0	2.5
35.	ISAS6540	5.7	12.0	4.0	2.5
36.	ISAS615	5.7	9.5	5.5	2.5
37.	ISAS625	5.7	10.5	5.5	2.5
38.	ISAS635	5.7	11.5	5.5	2.5
39.	ISAS645	5.7	12.5	5.5	2.5
40.	ISAS655	5.7	13.5	5.5	2.5
41.	ISAS617	5.7	11.0	7.0	2.5
42.	ISAS627	5.7	12.0	7.0	2.5
43.	ISAS637	5.7	13.0	7.0	2.5
44.	ISAS647	5.7	14.0	7.0	2.5
45.	ISAS657	5.7	15.0	7.0	2.5
46.	ISAS7140	6.5	8.0	4.0	2.5
47.	ISAS7240	6.5	9.0	4.0	2.5
48.	ISAS7340	6.5	10.0	4.0	2.5
49.	ISAS7440	6.5	11.0	4.0	2.5
50.	ISAS7540	6.5	12.0	4.0	2.5
51.	ISAS715	6.5	9.5	5.5	2.5
52.	ISAS725	6.5	10.5	5.5	2.5
53.	ISAS735	6.5	11.5	5.5	2.5
54.	ISAS745	6.5	12.5	5.5	2.5
55.	ISAS755	6.5	13.5	5.5	2.5

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.12. Shapable Abutment hex-type: ISSH428, ISSH448, ISSH528, ISSH548, ISSH628, ISSH648, ISSH728, ISSH748.

Table 14. Shapable Abutment hex-type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø max	Length	Hex Ø
1	ISSH428	4.5	13.0	2.5
2	ISSH448	4.5	15.0	2.5
3	ISSH528	5.2	13.0	2.5
4	ISSH548	5.2	15.0	2.5
5	ISSH628	5.7	13.0	2.5
6	ISSH648	5.7	15.0	2.5
7	ISSH728	6.5	13.0	2.5
8	ISSH748	6.5	15.0	2.5

* - Tolerance max. $\pm 1\%$




8.13. Abutment IS Link hex-type: ISLKH4035NB, ISLKH4535NB.

Table 15. Abutment IS Link hex-type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			
		Ø max	Length of a crown part	Length	Hex Ø
1	ISLKH4035NB	4.0	3.5	7.5	2.5
2	ISLKH4535NB	4.5	3.5	7.5	2.5

* - Tolerance max. $\pm 1\%$

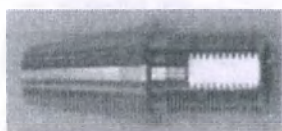

8.14. Abutment IS Link non-hex type: ISLKN4035NB, ISLKN4535NB.

Table 16. Abutment IS Link non hex type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø max	Length of a crown part	Length
1	ISLKN4035NB	4.0	3.5	7.5
2	ISLKN4535NB	4.5	3.5	7.5

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.15. Abutment IS Link type SCRP: ISLKS4035NB, ISLKS4535NB.

Table 17. Abutment IS Link type SCRP: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			
		Ø max	Length of a crown part	Length	Hex Ø
1	ISLKS4035NB	4.0	3.5	7.5	2.5
2	ISLKS4535NB	4.5	3.5	7.5	2.5

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.16. IS Titanium Cylinder hex-type: ISTCAH450, ISTCAH5509.

Table 18. IS Titanium Cylinder hex-type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			
		Ø max	Length of a crown part	Length	Hex Ø
1	ISTCAH4509	4.5	9.0	13.5	2.5
	ISTCAH5509	5.5	9.0	13.5	2.5

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.17. IS Titanium Cylinder non hex type: ISTCAN4509, ISTCAN5

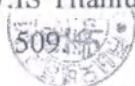


Table 19. IS Titanium Cylinder non hex type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ømax	Length of a crown part	Length
1	ISTCAN4509	4.5	9.0	13.5
2	ISTCAN5509	5.5	9.0	13.5

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.18. IS OS Mini Link hex-type: ISLKH4035OSM.

Table 20. IS OS Mini Link hex-type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			
		Ø max	Length of a crown part	Length	Hex Ø
1	ISLKH4035OSM	4.0	3.5	7.25	2.08

* - Tolerance max. $\pm 1\%$




8.19. Titanium block IS Ti Block hex type: ISBKH10NBD, ISBKH14NBD.

Table 21. Titanium block IS Ti Block hex type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			
		Inner carving Ø	Length	Ømax	Hex Ø
1	ISBKH10NBD	2.35	29.1	10.0	2.5
2	ISBKH14NBD	2.35	29.1	14.0	2.5

* - Tolerance max. $\pm 1\%$

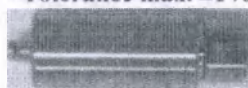

8.20. Titanium block IS Ti Block non hex type: ISBKN10NBD.

Table 22. Titanium block IS Ti Block non hex type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Inner carving Ø	Length	Ømax
1	ISBKN10NBD	2.35	29.1	10.0

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.21. Titanium block IS DM Ti Block hex type: ISBKH10DMD, ISBKH14DMD.

Table 23. Titanium block IS DM Ti Block hex type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			
		Inner carving Ø	Length	Ømax	Hex Ø
1	ISBKH10DMD	2.33	28.9	10.0	2.49
2	ISBKH14DMD	2.33	28.9	14.0	2.49

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.22.Titanium block IS DM Ti Block non hex type: ISBKN10DMD.

Table 24. Titanium block IS DM Ti Block non hex type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Inner carving Ø	Length	Ømax
1	ISBKN10DMD	2.33	28.9	10.0

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.23.Titanium block IS OS Ti Block hex type: ISBKH10OSMD, ISBK H10OSD, ISBKH14OSD.

Table 25. Titanium block IS OS Ti Block hex type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			
		Inner carving Ø	Length	Ø max	Hex Ø
1	ISBKH10OSMD	2.3	28.78	10.0	2.08
2	ISBKH10OSD	2.4	28.7	10.0	2.48
3	ISBKH14OSD	2.4	28.7	14.0	2.48

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.24.Titanium block IS OS Ti Block non hex type: ISBKN10OSMD, ISBKN10OSD

Table 26. Titanium block IS OS Ti Block non hex type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Inner carving Ø	Length	Ø max
1	ISBKN10OSMD	2.3	28.18	10.0
2	ISBKN10OSD	2.4	28.7	10.0

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.25.IS Angled Abutment A-type: ISAHA1427, ISAHA1437, ISAHA1447, ISAHA1527, ISAHA1537, ISAHA1547, ISAHA1627, ISAHA1637, ISAHA1647, ISAHA2427, ISAHA2437, ISAHA2447, ISAHA2527, ISAHA2537, ISAHA2547, ISAHA2627, ISAHA2637, ISAHA2647.

Table 27. IS Angled Abutment A-type: dimensions.

No	Item No.	Dimensions, mm				
		Ø max	Length	Length of a crown part	Hex Ø	Angle (°)
1	ISAHA1427	4.5	12.0	7.0	2.5	15
2	ISAHA1437	4.5	13.0	7.0	2.5	15
3	ISAHA1447	4.5	14.0	7.0	2.5	15
4	ISAHA1527	5.2	12.0	7.0	2.5	15
5	ISAHA1537	5.2	13.0	7.0	2.5	15
6	ISAHA1547	5.2	14.0	7.0	2.5	15
7	ISAHA1627	5.7	12.0	7.0	2.5	15
8	ISAHA1637	5.7	13.0	7.0	2.5	15
9	ISAHA1647	5.7	14.0	7.0	2.5	15
10	ISAHA2427	4.5	12.0	7.0	2.5	25
11	ISAHA2437	4.5	13.0	7.0	2.5	25
12	ISAHA2447	4.5	14.0	7.0	2.5	25
13	ISAHA2527	5.2	12.0	7.0	2.5	25
14	ISAHA2537	5.2	13.0	7.0	2.5	25
15	ISAHA2547	5.2	14.0	7.0	2.5	25
16	ISAHA2627	5.7	12.0	7.0	2.5	25
17	ISAHA2637	5.7	13.0	7.0	2.5	25
18	ISAHA2647	5.7	14.0	7.0	2.5	25

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.26.IS Angled Abutment B-type: ISAHB1427, ISAHB1437, ISAHB1447, ISAHB1527, ISAHB1537, ISAHB1547, ISAHB1627, ISAHB1637, ISAHB1647, ISAHB2427, ISAHB2437, ISAHB2447, ISAHB2527, ISAHB2537, ISAHB2547, ISAHB2627, ISAHB2637, ISAHB2647.

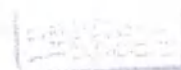


Table 28. IS Angled Abutment B-type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm				
		Ø max	Length	Length of a crown part	Hex Ø	Angle (°)
1	ISAHB1427	4.5	12.0	7.0	2.5	15
2	ISAHB1437	4.5	13.0	7.0	2.5	15
3	ISAHB1447	4.5	14.0	7.0	2.5	15
4	ISAHB1527	5.2	12.0	7.0	2.5	15
5	ISAHB1537	5.2	13.0	7.0	2.5	15
6	ISAHB1547	5.2	14.0	7.0	2.5	15
7	ISAHB1627	5.7	12.0	7.0	2.5	15
8	ISAHB1637	5.7	13.0	7.0	2.5	15
9	ISAHB1647	5.7	14.0	7.0	2.5	15
10	ISAHB2427	4.5	12.0	7.0	2.5	25
11	ISAHB2437	4.5	13.0	7.0	2.5	25
12	ISAHB2447	4.5	14.0	7.0	2.5	25
13	ISAHB2527	5.2	12.0	7.0	2.5	25
14	ISAHB2537	5.2	13.0	7.0	2.5	25
15	ISAHB2547	5.2	14.0	7.0	2.5	25
16	ISAHB2627	5.7	12.0	7.0	2.5	25
17	ISAHB2637	5.7	13.0	7.0	2.5	25
18	ISAHB2647	5.7	14.0	7.0	2.5	25

* - Tolerance max. ±1%



8.27.IS Angled Abutment non hex type: ISANA1427, ISANA1437, ISANA1447, ISANA1527, ISANA1537, ISANA1547, ISANA1627, ISANA1637, ISANA1647, ISANA2427, ISANA2437, ISANA2447, ISANA2527, ISANA2537, ISANA2547, ISANA2627, ISANA2637, ISANA2647.

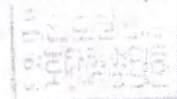


Table 29. IS Angled Abutment non hex type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			
		Ø max	Length	Length of a crown part	Angle (°)
1	ISANA1427	4.5	12.0	7.0	15
2	ISANA1437	4.5	13.0	7.0	15
3	ISANA1447	4.5	14.0	7.0	15
4	ISANA1527	5.2	12.0	7.0	15
5	ISANA1537	5.2	13.0	7.0	15

6	ISANA1547	5.2	14.0	7.0	15
7	ISANA1627	5.7	12.0	7.0	15
8	ISANA1637	5.7	13.0	7.0	15
9	ISANA1647	5.7	14.0	7.0	15
10	ISANA2427	4.5	12.0	7.0	25
11	ISANA2437	4.5	13.0	7.0	25
12	ISANA2447	4.5	14.0	7.0	25
13	ISANA2527	5.2	12.0	7.0	25
14	ISANA2537	5.2	13.0	7.0	25
15	ISANA2547	5.2	14.0	7.0	25
16	ISANA2627	5.7	12.0	7.0	25
17	ISANA2637	5.7	13.0	7.0	25
18	ISANA2647	5.7	14.0	7.0	25

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.28.IS Ball Abutment: ISABA100, ISABA200, ISABA300, ISABA400.

Table 30. IS Ball Abutment: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		$\varnothing$ max	Length of a crown part	Length
1	ISABA100	3.5	4.1	11.1
2	ISABA200	3.5	4.1	12.1
3	ISABA300	3.5	4.1	13.1
4	ISABA400	3.5	4.1	14.1

* - Tolerance max $\pm 1\%$



8.29.Abutment retainer BAR20.

Table 31. Abutment retainer BAR20: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm	
		Ø	Height
1	BAR20	5.0	2.0




8.30. Abutment housing: BAH40

Table 32. Abutment housing BAH40: dimensions.

Item No.	Part No.	Dimensions, mm	
		Ø max	Height
1	BAH40	5.0	4.0

* - Tolerance max $\pm 1\%$

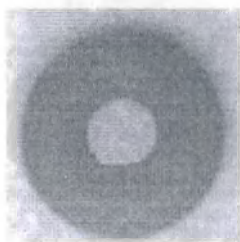

8.31 Ball abutment clinical ring BAORING.

Table 33. Ball abutment clinical ring BAORING: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm	
		Ø max	Ø min
1	BAORING	4.6	1.5

* - Tolerance max $\pm 1\%$



8.32. Laboratory sealing ring, a component of Abutment retainer BAR20 and Abutment housing BAH40.

Table 34. Laboratory sealing ring, a component of Abutment retainer BAR20 and Abutment housing BAH40: dimensions.

No.	Dimensions, mm	
	Ømax	Ømin
1	4,7	4,5

* - Tolerance max $\pm 1\%$



8.33. Burn out abutment IS CCM UCLA hex-type: ISUCH400.

Table 35. Burn out abutment IS CCM UCLA hex-type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			
		Ø max	Length	Length of a crown part	Hex Ø
1	ISUCH400	4.5	14.0	10.0	2.5

* - Tolerance max. $\pm 1\%$




8.34. Burn out abutment IS CCM UCLA non hex-type: ISUCN400.

Table 36. Burn out abutment IS CCM UCLA non hex type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ømax	Length	Length of a crown part
1	ISUCN400	4.5	14.0	10.0

* - Tolerance max. $\pm 1\%$

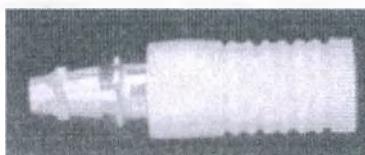


8.35. Burn out abutment IS CCM UCLA type SCRP: ISUCS400.

Table 37. Burn out abutment IS CCM UCLA type SCRP: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			
		Ø max	Length	Length of a crown part	Hex Ø
1	ISUCS400	4.5	14.0	10.0	2.5

* - Tolerance max $\pm 1\%$

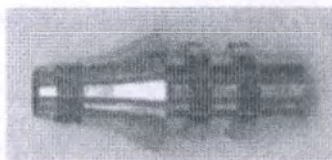

8.36. IS temporary abutment hex-type: ISAHT460, ISAHT480, ISAHT560, ISAHT580, ISAHT4130.

Table 38. IS temporary abutment hex-type: dimensions.


No.	Item No.	Dimensions, mm			
		Ø max	Height of a platform	Length	Hex Ø
1	ISAHT460	4.5	5.1	11.1	2.5
2	ISAHT480	4.5	5.1	13.1	2.5
3	ISAHT560	5.2	5.1	11.1	2.5
4	ISAHT580	5.2	5.1	13.1	2.5

* - Tolerance max. $\pm 1\%$

Table 39. IS temporary abutment hex-type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			
		Ø max	Height of a platform	Length	Hex Ø
1	ISAHT4130	4.5	4.6	16.1	2.5

* - Tolerance max. $\pm 1\%$

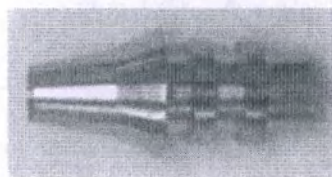

8.37. IS temporary abutment non hex type: ISANT460, ISANT480, ISANT560, ISANT580, ISANT4130.

Table 40. IS temporary abutment non hex type: dimensions.


No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø max	Height of a platform	Length
1	ISANT460	4.5	5.1	11.1
2	ISANT480	4.5	5.1	13.1
3	ISANT560	5.2	5.1	11.1
4	ISANT580	5.2	5.1	13.1

* - Tolerance max $\pm 1\%$

Table 41. IS temporary abutment non hex type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø max	Height of a platform	Length
1	ISANT4130	4.5	4.6	16.1

* - Tolerance max. $\pm 1\%$

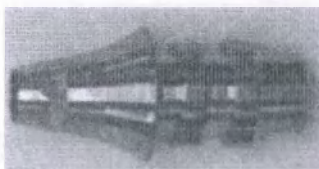

8.38.IS temporary abutment type SCRP: ISAST460, ISAST480, ISAST4130.

Table 42. IS temporary abutment type SCRP: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			
		Ø max	Height of a platform	Length	Hex Ø
1	ISAST460	4.5	5.1	11.1	2.5
2	ISAST480	4.5	5.1	13.1	2.5

* - Tolerance max. $\pm 1\%$

Table 43. IS temporary abutment type SCRP: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			
		Ø max	Height of a platform	Length	Hex Ø
1	ISAST4130	4.5	4.6	16.1	2.5

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.39. Abutment screw: ISCS20

Table 44. Abutment screw: ISCS20: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm	
		Length	Diameter Ø
1	ISCS20	8.8	2.3

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.40. Abutment screw: ISCS20OS.

Table 45. Abutment screw: ISCS20OS: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø max	Length	Carving Ø
1	ISCS20OS	2.35	8.35	1.95

* - Tolerance max $\pm 1\%$



8.41. Abutment screw: ISCS20COS.

Table 46. Abutment screw: ISCS20COS: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø max	Length	Ø min
1	ISCS20COS	2.3	8.3	1.95



8.42. Abutment screw: ISCS20DM

Table 47. Abutment screw: ISCS20DM: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø max	Length	Carving Ø
1	ISCS20DM	2.3	10.2	1.95

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.43. IS Multi Unit Angled Abutment screw: ISAMUAS20.

Table 48. IS Multi Unit Angled Abutment screw: ISAMUAS20: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø max	Length	Carving Ø
1	ISAMUAS20	2.3	8.3	1.95

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.44. Abutment screw: ISCS16OSM.

Table 49. Abutment screw: ISCS16OSM: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø max	Length	Carving Ø
1	ISCS16OSM	2.25	10.2	1.55

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.45. Impression coping: ISIPH411O, ISIPH511O, ISIPH611O, ISIPH400, ISIPH450, ISIPH411, ISIPH511, ISIPH611, ISIPN400, ISIPN450, ISIPN411, ISIPN511, ISIPN611, ISIPS400, ISIPS450, ISIPS411, ISIPS511, ISIPS611, ISIPHL400, ISIPHL450, ISIPHL411, ISIPHL511, ISIPHL611, ISIPNL400, ISIPNL450, ISIPNL411, ISIPNL511, ISIPNL611, ISIPSL400, ISIPSL450, ISIPSL411, ISIPSL511, ISIPSL611.

Table 50. Impression coping: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø max	Length	Hex Ø
1	ISIPH411O	4.8	14.5	2.48
2	ISIPH511O	5.5	14.5	2.48
3	ISIPH611O	6.0	14.5	2.48

* - Tolerance max $\pm 1\%$

Table 51. Impression coping: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø max	Length	Hex Ø
1.	ISIPH400	4.0	14.7	2.5
2.	ISIPH450	4.5	14.7	2.5
3.	ISIPH411	4.8	14.7	2.5
4.	ISIPH511	5.5	14.7	2.5
5.	ISIPH611	6.0	14.7	2.5
6.	ISIPHL400	4.0	17.7	2.5
7.	ISIPHL450	4.5	17.7	2.5
8.	ISIPHL411	4.8	17.7	2.5
9.	ISIPHL511	5.5	17.7	2.5
10.	ISIPHL611	6.0	17.7	2.5

* - Tolerance max $\pm 1\%$

Table 52. Impression coping: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm	
		Ø max	Length
1.	ISIPN400	4.0	14.7
2.	ISIPN450	4.5	14.7
3.	ISIPN411	4.8	14.7
4.	ISIPN511	5.5	14.7
5.	ISIPN611	6.0	14.7
6.	ISIPNL400	4.0	17.7
7.	ISIPNL450	4.5	17.7
8.	ISIPNL411	4.8	17.7
9.	ISIPNL511	5.5	17.7
10.	ISIPNL611	6.0	17.7

Table 53. Impression coping: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø max	Length	Hex Ø
1.	ISIPS400	4.0	14.7	2.5
2.	ISIPS450	4.5	14.7	2.5
3.	ISIPS411	4.8	14.7	2.5
4.	ISIPS511	5.5	14.7	2.5

Page 33 of 51

Instruction for Use for the Medical Device (version 2):
Prosthetic components for dental implants Neobiotech

5.	ISIPS611	6.0	14.7	2.5
6.	ISIPSL400	4.0	17.7	2.5
7.	ISIPSL450	4.5	17.7	2.5
8.	ISIPSL411	4.8	17.7	2.5
9.	ISIPSL511	5.5	17.7	2.5
10.	ISIPSL611	6.0	17.7	2.5

* - Tolerance max. $\pm 1\%$

8.46. Impression coping Screw: ISPIS20, ISPISL20.



Table 54. Impression coping Screw: ISPIS20, ISPISL20: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm	
		Length	Ø max
1	ISPIS20	21.5	2.3
2	ISPISL20	24.5	2.3

* - Tolerance max $\pm 1\%$

8.47. Impression coping Screw: ISTIS20H, ISTISL20H



Table 55. Impression coping Screw ISTIS20H, ISTISL20H: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Length	Carving Ø	Hex Ø
1	ISTIS20H	19.0	1.95	1.2
2	ISTISL20H	22.0	1.95	1.2

* - Tolerance max $\pm 1\%$



8.48. Impression coping hex type: ISITH411, ISITH511, ISITH611, ISITHL411, ISITHL511, ISITHL611, ISITH411O, ISITH511O, ISITH611O;

Impression coping non hex type: ISITN411, ISITN511, ISITN611, ISITNL411, ISITNL511, ISITNL611.

Table 56. Impression coping: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø max	Length	Hex Ø
1	ISITH411O	4.8	14.7	2.48
2	ISITH511O	5.5	14.7	2.48
3	ISITH611O	6.0	14.7	2.48

* - Tolerance max. $\pm 1\%$

Table 57. Impression coping: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø max	Length	Hex Ø
1	ISITH411	4.8	14.7	2.5
2	ISITH511	5.5	14.7	2.5
3	ISITH611	6.0	14.7	2.5

* - Tolerance max $\pm 1\%$

Table 58. Impression coping: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm	
		Ø max	Length
1	ISITN411	4.8	14.7
2	ISITN511	5.5	14.7
3	ISITN611	6.0	14.7

* - Tolerance max. $\pm 1\%$

Table 59. Impression coping: dimensions.


No.	Item No.	Ø max	Length	Hex Ø
1	ISITHL411	4.8	17.7	2.5
2	ISITHL511	5.5	17.7	2.5
3	ISITHL611	6.0	17.7	2.5

* - Tolerance max. $\pm 1\%$

Table 60. Impression coping: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm	
		Ø max	Length
1	ISITNL411	4.8	17.7
2	ISITNL511	5.5	17.7
3	ISITNL611	6.0	17.7

* - Tolerance max $\pm 1\%$

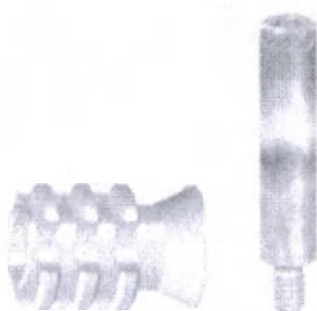

**8.49. Multi Unit Abutment Impression Pick-up:
MUAIP48.**

Table 61. Multi Unit Abutment Impression Pick-up: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm				
		Length	Impression pick-up Ø1	Impression pick-up Ø2	Screw carving Ø	Screw length
1	MUAIP48	9.0	4.8	5.3	1.35	13.05

* - Tolerance max $\pm 1\%$

8.50. Multi Unit Abutment Impression Transfer: MUAIT48.



Table 62. Multi Unit Abutment Impression Transfer: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm	
		Length	Ø max
1	MUAIT48	9.0	4.8

* - Tolerance max. $\pm 1\%$

8.51. Multi Unit Abutment transfer screw: MUAIPS48



Table 63. Multi Unit Abutment transfer screw: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Length	Carving Ø	Ø max
1	MUAIPS48	13.05	1.35	2.3

* - Tolerance max $\pm 1\%$

8.52. Plastic Impression Coping Cap: ISPIC411, ISPIC511, ISPIC611, ISPIC711.



Table 64. Plastic Impression Coping Cap: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø	Length	color
1	ISPIC411	5.0	12.6	yellow
2	ISPIC511	5.7	12.6	green
3	ISPIC611	6.2	12.6	blue
4	ISPIC711	7.0	12.6	purple

* - Tolerance max. $\pm 1\%$

8.53. Implant lab analog: ISLA400, ISLA500.



Table 65. Implant lab analog: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø max	Length	Hex Ø
1	ISLA400	3.8	12.0	2.5
2	ISLA500	4.3	12.0	2.5

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.54. Implant lab analog: ISLA440, ISLA455, ISLA470, ISLA540, ISLA555, ISLA570, ISLA640, ISLA655, ISLA670, ISLA740, ISLA755, ISLA770.

Table 66. Implant lab analog: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø max	Length	Length of a crown part
1.	ISLA440	4.5	17.1	4.0
2.	ISLA455	4.5	18.6	5.5
3.	ISLA470	4.5	20.1	7.0
4.	ISLA540	5.2	17.1	4.0
5.	ISLA555	5.2	18.6	5.5
6.	ISLA570	5.2	20.1	7.0
7.	ISLA640	5.7	17.1	4.0
8.	ISLA655	5.7	18.6	5.5
9.	ISLA670	5.7	20.1	7.0
10.	ISLA740	6.5	17.1	4.0
11.	ISLA755	6.5	18.6	5.5
12.	ISLA770	6.5	20.1	7.0

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.55. Implant lab analog: ISLA5000.

Table 67. Implant lab analog: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø max	Length	Hex Ø
1	ISLA5000	4.3	12.0	2.5

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.56. Multi Unit lab analog: MUALA48.

Table 68. Multi Unit lab analog: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm	
		Length	Ø max
1	MUALA48	14.2	4.8

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.57. Ball abutment lab analog: BALA350.

Table 69. Ball abutment lab analog: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø max	Ball part length	Length
1	BALA350	3.5	3.6	17.1

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.58. Guide Lab Analog: SGISLA400, SGISLA500.

Table 70. Guide Lab Analog: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Length	Ø	Hex Ø
1	SGISLA400	12.0	3.8	2.5
2	SGISLA500	12.0	4.3	2.5

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.59. Plastic UCLA abutment hex-type: ISUPH400, ISUPH500.

Table 71. Plastic UCLA abutment hex-type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Ø max	Length	Hex Ø
1	ISUPH400	4.5	13.4	2.5
2	ISUPH500	5.2	13.4	2.5

* - Tolerance max. $\pm 1\%$

8.60. Plastic UCLA abutment non hex type:
ISUPN400, ISUPN500.



Table 72. Plastic UCLA abutment non hex type: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm	
		Ø max	Length
1	ISUPN400	4.5	13.4
2	ISUPN500	5.2	13.4

* - Tolerance max. $\pm 1\%$

8.61. Plastic cap: ISPCN410, ISPCN510, ISPCN610, ISPCN710, ISPCN410, ISPCN510, ISPCN610, ISPCN710.



Table 73. Plastic cap: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm	
		Ø max	Length
1	ISPCN410	4.94	11.75
2	ISPCN510	5.64	11.75
3	ISPCN610	6.14	11.75
4	ISPCN710	6.96	11.75

* - Tolerance max. $\pm 1\%$

Table 74. Plastic cap: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm	
		Ø max	Length
1	ISPCN410	4.94	11.75
2	ISPCN510	5.64	11.75
3	ISPCN610	6.14	11.75
4	ISPCN710	6.96	11.75

* - Tolerance max. $\pm 1\%$

8.62. IS Multi Unit angled Abutment Holder: AMUAH35.



Table 75. IS Multi Unit angled Abutment Holder: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Length	Ø max	Ø min
1	AMUAH35	22.0	3.5	1.25

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.63.Surgical Guide Sleeve: SGS55N, SGS70RW, CSGS70 RW.

Table 76. Surgical Guide Sleeve: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			color
		Height	Ø max	Width	
1	SGS55N	3.5	5.5	4.7	yellow
2	SGS70RW	3.5	7.0	5.8	green

* - Tolerance max. $\pm 1\%$

Table 77. Surgical Guide Sleeve: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			color
		Height	Ø max	Width	
1	CSGS70RW	3.5	6.7	5.8	green

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.64.Fixture Remover Screw: FRS14, FRS16, FRS18, FRS172, FRS20, FRS25.

Table 78. Fixture Remover Screw: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Length	Carving Ø min.	Hex Ø
1	FRS14	15.5	1.4	1.61
2	FRS16	15.5	1.6	1.61
3	FRS18	15.5	1.8	1.61
4	FRS172	15.5	1.85	1.61
5	FRS20	15.5	2.0	1.61
6	FRS25	14.7	2.5	1.61

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.65.PickCap Impression Cap: PCISC01, PCILC01, PCISC0110S, PCILC0110S.

Table 79. PickCap Impression Cap: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm		
		Width of the inner part	Height	Diameter Ø
1	PCISC01, PCISC0110S	2.65	4.4	5.25
2	PCILC01, PCILC0110S	3.45	4.4	6.6

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.66. PickCap Impression Screw: ISPCIS20.

Table 80. PickCap Impression screw: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm	
		Length	Carving Ø
1	ISPCIS20	7.0	1.95

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.67. PickCap Impression Screw: ISPCIS16.

Table 81. PickCap Impression screw: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm	
		Length	Carving Ø
1	ISPCIS16	9.2	1.55

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.68. PickCap Impression Screw: EBPCIS16, EBPCIS20, EBPCIS25.

Table 82. PickCap Impression Screw: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm	
		Length	Carving Ø
1	EBPCIS16	7.0	1.55
2	EBPCIS20	7.0	1.95
3	EBPCIS25	7.0	2.47

* - Tolerance max. $\pm 1\%$

8.69.PickCap Impression: ISPCIB3503C, ISPCIB3505C, ISPCIB3508C, ISPCIB3510C, ISPCIB4003C, ISPCIB4005C, ISPCIB4008C, ISPCIB4010C, ISPCIB403C, ISPCIB405C, ISPCIB408C, ISPCIB410C, ISPCIB502C, ISPCIB503C, ISPCIB504C, ISPCIB505C, ISPCIB506C, ISPCIB602C, ISPCIB603C, ISPCIB604C, ISPCIB605C, ISPCIB606C, ISPCIB702C, ISPCIB703C, ISPCIB704C, ISPCIB705C, ISPCIB706C.

Table 83. PickCap Impression: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			color
		Length	Ø max	Hex Ø	
1.	ISPCIB3503C	10.0	3.6	2.5	blue
2.	ISPCIB3505C	12.0	3.6	2.5	green
3.	ISPCIB3508C	15.0	3.6	2.5	blue
4.	ISPCIB3510C	17.0	3.6	2.5	green
5.	ISPCIB4003C	10.0	4.1	2.5	yellow
6.	ISPCIB4005C	12.0	4.1	2.5	purple
7.	ISPCIB4008C	15.0	4.1	2.5	yellow
8.	ISPCIB4010C	17.0	4.1	2.5	purple
9.	ISPCIB403C	10.0	4.6	2.5	blue
10.	ISPCIB405C	12.0	4.6	2.5	green
11.	ISPCIB408C	15.0	4.6	2.5	blue
12.	ISPCIB410C	17.0	4.6	2.5	green

* - Tolerance max $\pm 1\%$



Table 84. PickCap Impression: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			color
		Length	Ø max	Hex Ø	
1.	ISPCIB502C	9.2	5.3	2.5	yellow
2.	ISPCIB503C	10.2	5.3	2.5	purple
3.	ISPCIB504C	11.2	5.3	2.5	yellow
4.	ISPCIB505C	12.2	5.3	2.5	purple
5.	ISPCIB506C	13.2	5.3	2.5	yellow
6.	ISPCIB602C	9.2	5.8	2.5	blue
7.	ISPCIB603C	10.2	5.8	2.5	green
8.	ISPCIB604C	11.2	5.8	2.5	blue
9.	ISPCIB605C	12.2	5.8	2.5	green
10.	ISPCIB606C	13.2	5.8	2.5	blue
11.	ISPCIB702C	9.2	6.6	2.5	yellow
12.	ISPCIB703C	10.2	6.6	2.5	purple
13.	ISPCIB704C	11.2	6.6	2.5	yellow
14.	ISPCIB705C	12.2	6.6	2.5	purple
15.	ISPCIB706C	13.2	6.6	2.5	yellow

* - Tolerance max $\pm 1\%$



8.70.PickCap Impression: ISSNPCI3505C, ISSNPCI3507C.

Table 85. PickCap Impression: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			color
		Length	Ø max	Hex Ø	
1	ISSNPCI3505C	11.6	3.6	2.08	green
2	ISSNPCI3507C	13.6	3.6	2.08	blue

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.71.PickCap Impression: ISOSPCI503C, ISOSPCI505C, ISOSPCI403C, ISOSPCI405C.

Table 86. PickCap Impression: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			color
		Length	Ø max	Hex Ø	
1	ISOSPCI403C	10.1	4.6	2.48	blue
2	ISOSPCI405C	12.1	4.6	2.48	green
3	ISOSPCI503C	10.3	5.3	2.48	purple
4	ISOSPCI505C	12.3	5.3	2.48	purple

Page 43 of 51

Instruction for Use for the Medical Device (version 2):
Prosthetic components for dental implants Neobiotech

* - Tolerance max $\pm 1\%$



8.72.PickCap Impression: EBPCIBN403C, EBPCIBN405C, EBPCIBR403C, EBPCIBR405C, EBPCIBR503C, EBPCIBR505C.

Table 87. PickCap Impression: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			color
		Length	Ø max	Hex Ø	
1	EBPCIBN403C	7.7	4.8	2.4	yellow
2	EBPCIBN405C	9.7	4.8	2.4	blue
3	EBPCIBR403C	7.7	4.8	2.7	purple
4	EBPCIBR405C	9.7	4.8	2.7	green
5	EBPCIBR503C	7.9	5.5	2.7	yellow
6	EBPCIBR505C	9.9	5.5	2.7	blue

* - Tolerance max. $\pm 1\%$



8.73.PickCap Impression: ITPCIB503C, ITPCIB703C.

Table 88. PickCap Impression: dimensions.

No.	Item No.	Dimensions, mm			color
		Length	Ø max	Hex Ø	
1	ITPCIB503C	9.05	5.6	3.1	purple
2	ITPCIB703C	9.15	7.3	3.1	green

Table 89. Physical characteristics

Item No.	Measure	Regulatory requirements
1	Fatigue strength	≥ 250 N
2	Compressive strength in shear (fractural strength)	≥ 600 N

9. List of standards that the medical device complies with.

Directive 93/42/EEC as amended by 2007/47/EC regarding the Medical Device Directive; ISO 13485; EN ISO 14971, EN 1041, ISO 15223-1, ISO/IEC 17050-1, EN 1642, ISO 5832-3, ASTM F 136-13, ASTM F67-13, ASTM F1537, ISO 14801, ISO 10993-1, ISO 10993-5, ISO 10993-10, MEDDEV 2.7.1 Rev.4, KS I ISO 14644-1, KS Q ISO2859-1.

Reference standards are used in the latest edition: the organization maintains and updates the list of reference standards as a record of its own management system in accordance with ISO 13485.

10. Scope of supply.

No.	Version	Quantity in a package
1.	I. Abutment IS Link non hex type, versions: ISLKN4035NB, ISLKN4535NB II. Instruction for use.	1 pc./package.
2.	I. Abutment IS Link hex type, versions: ISLKH4035NB, ISLKH4535NB II. Instruction for use.	1 pc./package.
3.	I. Abutment IS Link type SCRP, versions: ISLKS4035NB, ISLKS4535NB II. Instruction for use.	1 pc./package.
4.	I. IS Multi Unit Abutment straight with holder, version: ISMUA4810S, ISMUA4820S, ISMUA4830S, ISMUA4840S II. Instruction for use.	1 pc./package.
5.	I. IS Multi Unit Angled Abutment with holder, versions: ISANMUA1410S, ISANMUA1420S, ISANMUA1430S, ISANMUA1440S, ISANMUA3410S, ISANMUA3420S, ISANMUA3430S, ISANMUA3440S II. Instruction for use.	1 pc./package.
6.	I. IS Multi Unit Angled Abutment hex-type, with holder, versions: ISAHMUA1410S, ISAHMUA1420S, ISAHMUA1430S, ISAHMUA1440S, ISAHMUA3410S, ISAHMUA3420S, ISAHMUA3430S, ISAHMUA3440S II. Instruction for use.	1 pc./package.
7.	I. IS OS Abutment, versions: ISAH4150, ISAH4250, ISAH4350, ISAH4450, ISAH4550, ISAH5140, ISAH5240, ISAH5340, ISAH5440, ISAH5540, ISAH5150, ISAH5250, ISAH5350, ISAH5450, ISAH5550, ISAH5170, ISAH5270, ISAH5370, ISAH5470, ISAH5570, ISAH6140, ISAH6240, ISAH6340, ISAH6440, ISAH6540, ISAH6150, ISAH6250, ISAH6350, ISAH6450, ISAH6550, ISAH6170, ISAH6270, ISAH6370, ISAH6470, ISAH6570 II. Instruction for use.	1 pc./package.
8.	I. IS Angled Abutment B-type, versions: ISAHB1427, ISAHB1437, ISAHB1447, ISAHB1527, ISAHB1537, ISAHB1547, ISAHB1627, ISAHB1637, ISAHB1647, ISAHB2427, ISAHB2437, ISAHB2447, ISAHB2527, ISAHB2537, ISAHB2547, ISAHB2627, ISAHB2637, ISAHB2647 II. Instruction for use.	1 pc./package.
9.	I. IS Angled Abutment A-type, versions: ISAHA1427, ISAHA1437, ISAHA1447, ISAHA1527, ISAHA1537,	1 pc./package.

	ISAHA1547, ISAHA1627, ISAHA1637, ISAHA1647, ISAHA2427, ISAHA2437, ISAHA2447, ISAHA2527, ISAHA2537, ISAHA2547, ISAHA2627, ISAHA2637, ISAHA2647 II. Instruction for use.	
10.	I. IS Angled Abutment non hex type, versions: ISANA1427, ISANA1437, ISANA1447, ISANA1527, ISANA1537, ISANA1547, ISANA1627, ISANA1637, ISANA1647, ISANA2427, ISANA2437, ISANA2447, ISANA2527, ISANA2537, ISANA2547, ISANA2627, ISANA2637, ISANA2647 II. Instruction for use.	1 pc./package.
11.	I. IS Ball Abutment, versions: ISABA100, ISABA200, ISABA300, ISABA400 II. Instruction for use.	1 pc./package.
12.	I. Solid IS Abutment, versions: ISAE4140, ISAE4240, ISAE4340, ISAE4440, ISAE4540, ISAE415, ISAE425, ISAE435, ISAE445, ISAE455, ISAE417, ISAE427, ISAE437, ISAE447, ISAE457, ISAE5140, ISAE5240, ISAE5340, ISAE5440, ISAE5540, ISAE515, ISAE525, ISAE535, ISAE545, ISAE555, ISAE517, ISAE527, ISAE537, ISAE547, ISAE557, ISAE6140, ISAE6240, ISAE6340, ISAE6440, ISAE6540, ISAE615, ISAE625, ISAE635, ISAE645, ISAE655, ISAE617, ISAE627, ISAE637, ISAE647, ISAE657, ISAE7240, ISAE7340, ISAE715, ISAE725, ISAE735, ISAE745, ISAE755 II. Instruction for use.	1 pc./package.
13.	I. IS temporary abutment non hex type, versions: ISANT460, ISANT480, ISANT560, ISANT580, ISANT4130 II. Instruction for use.	1 pc./package.
14.	I. IS temporary abutment hex type, versions: ISAHT460, ISAHT480, ISAHT560, ISAHT580, ISAHT4130 II. Instruction for use.	1 pc./package.
15.	I. IS temporary abutment type SCRP, versions: ISAST460, ISAST480, ISAST4130 II. Instruction for use.	1 pc./package.
16.	I. Burn out abutment IS CCM UCLA non hex type: ISUCN400 II. Instruction for use.	1 pc./package.
17.	I. Burn out abutment IS CCM UCLA hex type: ISUCH400 II. Instruction for use.	1 pc./package.
18.	I. Burn out abutment IS CCM UCLA type SCRP: ISUCS400 II. Instruction for use.	1 pc./package.
19.	I. Plastic UCLA abutment non hex type, versions: ISUPN400, ISUPN500 II. Instruction for use.	1 pc./package.
20.	I. Plastic UCLA abutment hex type, versions: ISUPH400, ISUPH500 II. Instruction for use..	1 pc./package.
21.	I. Shapable Abutment hex-type, versions: ISSH428, ISSH448, ISSH528, ISSH548, ISSH628, ISSH648, ISSH728, ISSH748	1 pc./package.



	II. Instruction for use.	
22.	I. Cemented Abutment non hex-type, versions: ISAN4140, ISAN4240, ISAN4340, ISAN4440, ISAN4540, ISAN415, ISAN425, ISAN435, ISAN445, ISAN455, ISAN417, ISAN427, ISAN437, ISAN447, ISAN457, ISAN5140, ISAN5240, ISAN5340, ISAN5440, ISAN5540, ISAN515, ISAN525, ISAN535, ISAN545, ISAN555, ISAN517, ISAN527, ISAN537, ISAN547, ISAN557, ISAN6140, ISAN6240, ISAN6340, ISAN6440, ISAN6540, ISAN615, ISAN625, ISAN635, ISAN645, ISAN655, ISAN617, ISAN627, ISAN637, ISAN647, ISAN657, ISAN7140, ISAN7240, ISAN7340, ISAN7440, ISAN7540, ISAN715, ISAN725, ISAN735, ISAN745, ISAN755 II. Instruction for use.	1 pc./package.
23.	I. Cemented Abutment hex-type, versions: ISAH4140, ISAH4240, ISAH4340, ISAH4440, ISAH4540, ISAH415, ISAH425, ISAH435, ISAH445, ISAH455, ISAH417, ISAH427, ISAH437, ISAH447, ISAH457, ISAH5140, ISAH5240, ISAH5340, ISAH5440, ISAH5540, ISAH515, ISAH525, ISAH535, ISAH545, ISAH555, ISAH517, ISAH527, ISAH537, ISAH547, ISAH557, ISAH6140, ISAH6240, ISAH6340, ISAH6440, ISAH6540, ISAH615, ISAH625, ISAH635, ISAH645, ISAH655, ISAH617, ISAH627, ISAH637, ISAH647, ISAH657, ISAH7140, ISAH7240, ISAH7340, ISAH7440, ISAH7540, ISAH715, ISAH725, ISAH735, ISAH745, ISAH755 II. Instruction for use.	1 pc./package.
24.	I. Cemented Abutment type SCRP, versions: ISAS4140, ISAS4240, ISAS4340, ISAS4440, ISAS4540, ISAS415, ISAS425, ISAS435, ISAS445, ISAS455, ISAS417, ISAS427, ISAS437, ISAS447, ISAS457, ISAS5140, ISAS5240, ISAS5340, ISAS5440, ISAS5540, ISAS515, ISAS525, ISAS535, ISAS545, ISAS555, ISAS517, ISAS527, ISAS537, ISAS547, ISAS557, ISAS6140, ISAS6240, ISAS6340, ISAS6440, ISAS6540, ISAS615, ISAS625, ISAS635, ISAS645, ISAS655, ISAS617, ISAS627, ISAS637, ISAS647, ISAS657, ISAS7140, ISAS7240, ISAS7340, ISAS7440, ISAS7540, ISAS715, ISAS725, ISAS735, ISAS745, ISAS755 II. Instruction for use.	1 pc./package.
25.	I. Implant lab analog, versions: ISLA400, ISLA500, ISLA440, ISLA455, ISLA470, ISLA540, ISLA555, ISLA570, ISLA640, ISLA655, ISLA670, ISLA740, ISLA755, ISLA770, ISLA5000 II. Instruction for use.	1 pc./package.
26.	I. Multi Unit lab analog: MUALA48 II. Instruction for use.	1 pc./package.
27.	I. Guide Lab Analog, versions: SGISLA400, SGISLA500 II. Instruction for use.	1 pc./package.
28.	I. Ball abutment lab analog: BALA350 II. Instruction for use.	1 pc./package.
29.	I. Titanium block IS DM Ti Block hex type, versions: ISBKH10DMD, ISBKH14DMD	1 pc./package.

	II. Instruction for use.	
30.	I. Titanium block IS DM Ti Block non hex type: ISBKN10DMD II. Instruction for use.	1 pc./package.
31.	I. Titanium block IS OS Ti Block hex type, versions: ISBKH10OSD, ISBKH14OSD, ISBKH10OSMD II. Instruction for use.	1 pc./package.
32.	Titanium block IS OS Ti Block non hex type, versions: ISBKN10OSD, ISBKN10OSMD Instruction for use.	1 pc./package.
33.	I. Titanium block IS Ti Block hex type, versions: ISBKH10NBD, ISBKH14NBD II. Instruction for use.	1 pc./package.
34.	I. Titanium block IS Ti Block non hex type: ISBKN10NBD II. Instruction for use.	1 pc./package.
35.	I. Abutment screw, versions: ISCS20, ISCS20OS, ISCS20COS, ISCS20DM, ISAMUAS20, ISCS16OSM II. Instruction for use.	1 pc./package.
36.	I. Screw for Multi Unit Abutment Cylinder: MUAS14 II. Instruction for use.	1 pc./package.
37.	I. PickCap Impression Screw, versions: ISPCIS20, ISPCIS16, EBPCIS16, EBPCIS20, EBPCIS25 II. Instruction for use.	1 pc./package.
38.	I. Multi Unit Abutment transfer screw: MUAIPS48 II. Instruction for use.	1 pc./package.
39.	I. Impression coping screw, versions: ISPIS20, ISPISL20, ISTIS20H, ISTISL20H II. Instruction for use.	1 pc./package.
40.	I. Fixture Remover Screw, versions: FRS14, FRS16, FRS18, FRS172, FRS20, FRS25 II. Instruction for use.	1 pc./package.
41.	I. Surgical Guide Sleeve, versions: SGS55N, SGS70RW, CSGS70RW II. Instruction for use.	1 pc./package.
42.	I. IS Multi Unit angled Abutment Holder: AMUAH35 II. Instruction for use.	1 pc./package.
43.	I. PickCap Impression Cap, versions: PCISC01, PCILC01 II. Instruction for use.	1 pc./package.
44.	I. PickCap Impression Cap, versions PCISC0110S, PCILC0110S II. Instruction for use.	10 pcs./package.
45.	I. Plastic Impression Coping Cap, versions: ISPIC411, ISPIC511, ISPIC611, ISPIC711 II. Instruction for use.	1 pc./package.
46.	I. Plastic cap, versions: ISPC410, ISPC4510, ISPC4610, ISPC4710, ISPCN410, ISPCN510, ISPCN610, ISPCN710 II. Instruction for use.	1 pc./package.
47.	I. Ball abutment clinical ring: BAORING II. Instruction for use.	3 pcs./package.

48.	I. Abutment housing: BAH40 II. Instruction for use.	1 pc./package.
49.	I. IS OS Mini Link hex-type: ISLKH4035OSM II. Instruction for use.	1 pc./package.
50.	I. PickCap Impression, versions: ISPCIB3503C, ISPCIB3505C, ISPCIB3508C, ISPCIB3510C, ISPCIB4003C, ISPCIB4005C, ISPCIB4008C, ISPCIB4010C, ISPCIB403C, ISPCIB405C, ISPCIB408C, ISPCIB410C, ISOSPCI403C, ISOSPCI405C, ISSNPCI3505C, ISSNPCI3507C, ISPCIB502C, ISPCIB503C, ISPCIB504C, ISPCIB505C, ISPCIB506C, ISPCIB602C, ISPCIB603C, ISPCIB604C, ISPCIB605C, ISPCIB606C, ISPCIB702C, ISPCIB703C, ISPCIB704C, ISPCIB705C, ISPCIB706C, ISOSPCI503C, ISOSPCI505C, EBPCIBN403C, EBPCIBN405C, EBPCIBR403C, EBPCIBR405C, EBPCIBR503C, EBPCIBR505C, ITPCIB503C, ITPCIB703C II. Instruction for use.	1 pc./package.
51.	I. Impression coping hex type, versions: ISITH411O, ISITH511O, ISITH611O, ISITH411, ISITH511, ISITH611, ISITHL411, ISITHL511, ISITHL611 II. Instruction for use.	1 pc./package.
52.	I. Impression coping non hex type, versions: ISITN411, ISITN511, ISITN611, ISITNL411, ISITNL511, ISITNL611 II. Instruction for use.	1 pc./package.
53.	I. Multi Unit Abutment Impression Transfer: MUAIT48 II. Instruction for use.	1 pc./package.
54.	I. Multi Unit Abutment Impression Pick-up: MUAIP48 II. Instruction for use.	1 pc./package.
55.	I. Impression coping, versions: ISIPH411O, ISIPH511O, ISIPH611O, ISIPH400, ISIPH450, ISIPH411, ISIPH511, ISIPH611, ISIPN400, ISIPN450, ISIPN411, ISIPN511, ISIPN611, ISIPS400, ISIPS450, ISIPS411, ISIPS511, ISIPS611, ISIPHL400, ISIPHL450, ISIPHL411, ISIPHL511, ISIPHL611, ISIPNL400, ISIPNL450, ISIPNL411, ISIPNL511, ISIPNL611, ISIPSL400, ISIPSL450, ISIPSL411, ISIPSL511, ISIPSL611 II. Instruction for use.	1 pc./package.
56.	I. Ball abutment retainer: BAR20 II. Instruction for use.	1 pc./package.
57.	I. IS Titanium Cylinder non hex type, versions: ISTCAN4509, ISTCAN5509 II. Instruction for use.	1 pc./package.
58.	I. IS Titanium Cylinder hex type, versions: ISTCAH4509, ISTCAH5509 II. Instruction for use.	1 pc./package.
59.	I. Multi Unit Cylinder CCM: MUACCN48 II. Instruction for use.	1 pc./package.
60.	I. Multi Unit Cylinder temporary: MUATPCN48 II. Instruction for use.	1 pc./package.

11. Interpretation of symbols used in the marking of consumer and transport package.

Table 90. Symbols and Explanation.

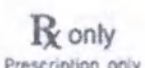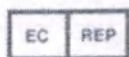Symbol	Interpretation	Symbol	Interpretation
	Manufacturer		Lot number
	Catalogue number (item number)		Best before
	Date of manufacture		Caution!
	Do not reuse		Do not use if the packaging is damaged
	Temperature limits		"Rx only" text – prescription only (in English)
	Non-sterile		Refer to the instructions for use
	Keep away from sunlight		Authorized representative in EU

12. Requirements for maintenance and repair of the medical device.

The devices do not require maintenance and repair.

13. Sterilization, cleaning and disinfection.

This product is supplied as a non-sterile medical device. It must be sterilized at 134 °C, sterilization time: 4 minutes, drying time: 30 minutes.

14. Transportation, storage and operation conditions.

Devices packed into shipping containers should be transported by all types of covered vehicles considering the precautions indicated on the shipping container and in accordance with the guidelines for goods transportation by this mode of transportation.

Transportation conditions:

- Temperature: +1 ~ +30 °C;
- Relative humidity: no special requirements;
- Atmospheric pressure: no special requirements.

Storage conditions: in a dry place, away from direct sunlight:

- Temperature: +1 ~ +30 °C;

- Relative humidity: no special requirements;
- Atmospheric pressure: no special requirements.

Operation conditions:

- Operation temperature: +32 ~ +42 °C.

Indoor operation conditions:

- Temperature: +18 ~ +30 °C.

15. Shelf life

The shelf life of prosthetic components for Neobiotech implants is not limited.

16. Procedure for the disposal and destruction of a medical device

Medical devices “Prosthetic components for dental implants Neobiotech” after their intended use are classified as epidemiologically hazardous waste (products contaminated with blood and/or other bodily fluids of patients, as well as products contacting with patients having infectious diseases).

In this case, a medical organization performs only collection and temporary storage of the above waste. Waste is collected to single-use bags or containers with color marking adopted for hazardous medical waste in a room or in places for temporary storage of medical waste before further transportation to a destruction or disposal site.

Transportation of medical waste (used components) from medical facilities and their disposal is provided by specialized organizations licensed to treat epidemiologically hazardous medical waste.

The consumer packaging, rejected products and unused products are classified as epidemiologically safe waste (non-hazardous waste not contacting bodily fluids of patients, patients having infectious diseases), which is close by composition to municipal solid waste. However, it is recommended to have them disposed of separately as industrial waste by specialized organizations licensed to carry out this kind of activity.

Non-hazardous waste is collected in reusable containers or single-use bags (with the exception of bags of a color used for hazardous waste). Single-use bags are placed inside reusable containers. Waste receptacles should be labeled and placed on the special site (indoors). After emptying, reusable containers should be cleaned and disinfected. The procedure for cleaning and disinfecting reusable containers is determined in accordance with the waste management plan in each specific organization.

Transportation and disposal are carried out with regard to requirements adopted at the given territory, as per the sanitary legislation of a particular country applied to the maintenance of populated areas and treatment of production and consumption waste.

등부 2023년 제 722호

Registered No. 2023-722

인 증

NOTARIAL CERTIFICATE

위 의료기기 사용설명서 _____ 에
기재된 주식회사 네오바이오텍
대표이사 허영구 _____

Yoon Han Ju _____
attorney-in-fact of
Neobiotech Co.,Ltd.
CEO / Heo Young Ku _____

의 대리인 윤한주 _____ 는
본 공증인의 면전에서 위 본인이 _____
기명날인한 것임을 확인하였다.

appeared before me and admitted
said principal`s subscription to
the attached Instruction for Use for
the Medical Device. _____

2023년 06월 08일
이 사무소에서 위 인증한다.

This is hereby attested on this
8th day of Jun. 2023 at this office.

공증사무소 명칭
공증 인가 **법무법인 디.엘.에스**

Name of the office
D. L. S PARTNERS

소 속 서울남부지방검찰청
소재지표시
서울특별시 구로구 디지털로31길 38-21
509호(구로동, 이앤씨3차)

Belong to **Seoul Southern
District Prosecutor's Office**
Address of the office
**E & C Venture Dream Tower 3rd Rm#509, 38-21,
Digital-ro 31-gil, Guro-gu, Seoul, Korea**

공증인 공증담당변호사
정 경 태

Jeong Kyeong Tae
Signature of the Notary Public
Jeong Kyeong Tae

본 사무소는 인가번호 제15150호에 의거하여
2020년 02월 07일 법무부 장관으로부터
공증인 업무를 행할 것을 인가 받았다.
This office has been authorized by the
Minister of Justice, the Republic of
Korea, to act as Notary Public Since
7, Feb. 2020 Under Law No.15150.

This document contains 53 pages
Heo Young Ku [signature] (signature)
CEO
«Neobiotech Co., Ltd.»



[Перевод с английского и корейского языков на русский язык]

[Печать: Нотариальная контора «ДИ.ЭЛ.ЭС. ПАРТНЕРС», нотариус Чон Кён Тэ]

И&Си Венчер Дрим Тауэр, 3 ком., № 509, 38-21,
Диджитал-ро, 31-гил, Куро-гу, Сеул, Корея
[Форма № 41]

**Нотариальная контора
«ДИ.ЭЛ.ЭС. ПАРТНЕРС»**

(Тел.) 02-6330-8660
(Факс) 02-6330-8680

Регистрационный номер: 2023 – 722

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

[Печать: «ДИ.ЭЛ.ЭС. ПАРТНЕРС», НОТАРИУС]

**«ДИ.ЭЛ.ЭС. ПАРТНЕРС»
(«D.L.S. PARTNERS»)**

И&Си Венчер Дрим Тауэр, 3 ком., № 509, 38-21,
Диджитал-ро, 31-гил, Куро-гу, Сеул, Корея
(E&C Venture Dream Tower 3rd Rm#509, 38-21,
Digital-ro 31-gil, Guro-gu, Seoul, Korea)

210 мм x 297 мм
(Бланк с защитой) (1 категория) 70 г/м²

Дата: 24 февраля 2022 г.

«Утверждено»

[Печать компании «Необайотек Ко., Лтд.»]

/подпись/ (подпись)

Хео Юнг Ку (Heo Young Ku)

Генеральный директор
«Необайотек Ко., Лтд.» (Neobiotech Co., Ltd.)

[Печать: Нотариальная контора «ДИ.ЭЛ.ЭС. ПАРТНЕРС», нотариус Чон Кён Тэ]

Инструкция по применению на медицинское изделие

Компоненты для протезирования для имплантатов дентальных Neobiotech

Версия 2

На каждой странице:

[Печать компании «Необайотек Ко., Лтд.»]

[Печать: Нотариальная контора «ДИ.ЭЛ.ЭС. ПАРТНЕРС», нотариус Чон Кён Тэ]

1. Наименование медицинского изделия

Компоненты для протезирования для имплантатов дентальных Neobiotech

I. Варианты исполнения:

1. Абатмент IS Link без шестигранника, варианты исполнения: ISLKN4035NB, ISLKN4535NB – 1 шт./уп.
2. Абатмент IS Link с шестигранником, варианты исполнения: ISLKH4035NB, ISLKH4535NB – 1 шт./уп.
3. Абатмент IS Link типа SCRP, варианты исполнения: ISLKS4035NB, ISLKS4535NB – 1 шт./уп.
4. Абатмент IS Multi Unit прямой с держателем, варианты исполнения: ISMUA4810S, ISMUA4820S, ISMUA4830S, ISMUA4840S – 1 шт./уп.
5. Абатмент IS Multi Unit угловой с держателем, варианты исполнения: ISANMUA1410S, ISANMUA1420S, ISANMUA1430S, ISANMUA1440S, ISANMUA3410S, ISANMUA3420S, ISANMUA3430S, ISANMUA3440S – 1 шт./уп.
6. Абатмент IS Multi Unit угловой с шестигранником, с держателем, варианты исполнения: ISAHMUA1410S, ISAHMUA1420S, ISAHMUA1430S, ISAHMUA1440S, ISAHMUA3410S, ISAHMUA3420S, ISAHMUA3430S, ISAHMUA3440S – 1 шт./уп.
7. Абатмент IS OS, варианты исполнения: ISAH4150, ISAH4250, ISAH4350, ISAH4450, ISAH4550, ISAH5140, ISAH5240, ISAH5340, ISAH5440, ISAH5540, ISAH5150, ISAH5250, ISAH5350, ISAH5450, ISAH5550, ISAH5170, ISAH5270, ISAH5370, ISAH5470, ISAH5570, ISAH6140, ISAH6240, ISAH6340, ISAH6440, ISAH6540, ISAH6150, ISAH6250, ISAH6350, ISAH6450, ISAH6550, ISAH6170, ISAH6270, ISAH6370, ISAH6470, ISAH6570 – 1 шт./уп.
8. Абатмент IS угловой В-типа, варианты исполнения: ISAHB1427, ISAHB1437, ISAHB1447, ISAHB1527, ISAHB1537, ISAHB1547, ISAHB1627, ISAHB1637, ISAHB1647, ISAHB2427, ISAHB2437, ISAHB2447, ISAHB2527, ISAHB2537, ISAHB2547, ISAHB2627, ISAHB2637, ISAHB2647 – 1 шт./уп.
9. Абатмент IS угловой А-типа, варианты исполнения: ISAHA1427, ISAHA1437, ISAHA1447, ISAHA1527, ISAHA1537, ISAHA1547, ISAHA1627, ISAHA1637, ISAHA1647, ISAHA2427, ISAHA2437, ISAHA2447, ISAHA2527, ISAHA2537, ISAHA2547, ISAHA2627, ISAHA2637, ISAHA2647 – 1 шт./уп.
10. Абатмент IS угловой без шестигранника, варианты исполнения: ISANA1427, ISANA1437, ISANA1447, ISANA1527, ISANA1537, ISANA1547, ISANA1627, ISANA1637, ISANA1647, ISANA2427, ISANA2437, ISANA2447, ISANA2527, ISANA2537, ISANA2547, ISANA2627, ISANA2637, ISANA2647 – 1 шт./уп.
11. Абатмент IS шаровидный, варианты исполнения: ISABA100, ISABA200, ISABA300, ISABA400 – 1 шт./уп.
12. Абатмент IS-монолитный, варианты исполнения: ISAE4140, ISAE4240, ISAE4340, ISAE4440, ISAE4540, ISAE415, ISAE425, ISAE435, ISAE445, ISAE455, ISAE417, ISAE427, ISAE437, ISAE447, ISAE457, ISAE5140, ISAE5240, ISAE5340, ISAE5440, ISAE5540, ISAE515, ISAE525, ISAE535, ISAE545, ISAE555, ISAE517, ISAE527, ISAE537, ISAE547, ISAE557, ISAE6140, ISAE6240, ISAE6340, ISAE6440, ISAE6540, ISAE615, ISAE625, ISAE635, ISAE645, ISAE655, ISAE617, ISAE627, ISAE637, ISAE647, ISAE657, ISAE7240, ISAE7340, ISAE715, ISAE725, ISAE735, ISAE745, ISAE755 – 1 шт./уп.
13. Абатмент временный IS без шестигранника, варианты исполнения: ISANT460, ISANT480, ISANT560, ISANT580, ISANT4130 – 1 шт./уп.

14. Абатмент временный IS с шестигранником, варианты исполнения: ISANT460, ISANT480, ISANT560, ISANT580, ISANT4130 – 1 шт./уп.
15. Абатмент временный IS типа SCRP, варианты исполнения: ISAST460, ISAST480, ISAST4130 – 1 шт./уп.
16. Абатмент выжигаемый IS CCM UCLA без шестигранника: ISUCN400 – 1 шт./уп.
17. Абатмент выжигаемый IS CCM UCLA с шестигранником: ISUCH400 – 1 шт./уп.
18. Абатмент выжигаемый IS CCM UCLA типа SCRP: ISUCS400 – 1 шт./уп.
19. Абатмент пластиковый UCLA без шестигранника, варианты исполнения: ISUPN400, ISUPN500 – 1 шт./уп.
20. Абатмент пластиковый UCLA с шестигранником, варианты исполнения: ISUPH400, ISUPH500 – 1 шт./уп.
21. Абатмент фрезеруемый с шестигранником, варианты исполнения: ISSH428, ISSH448, ISSH528, ISSH548, ISSH628, ISSH648, ISSH728, ISSH748 – 1 шт./уп.
22. Абатмент цементируемый без шестигранника, варианты исполнения: ISAN4140, ISAN4240, ISAN4340, ISAN4440, ISAN4540, ISAN415, ISAN425, ISAN435, ISAN445, ISAN455, ISAN417, ISAN427, ISAN437, ISAN447, ISAN457, ISAN5140, ISAN5240, ISAN5340, ISAN5440, ISAN5540, ISAN515, ISAN525, ISAN535, ISAN545, ISAN555, ISAN517, ISAN527, ISAN537, ISAN547, ISAN557, ISAN6140, ISAN6240, ISAN6340, ISAN6440, ISAN6540, ISAN615, ISAN625, ISAN635, ISAN645, ISAN655, ISAN617, ISAN627, ISAN637, ISAN647, ISAN657, ISAN7140, ISAN7240, ISAN7340, ISAN7440, ISAN7540, ISAN715, ISAN725, ISAN735, ISAN745, ISAN755 – 1 шт./уп.
23. Абатмент цементируемый с шестигранником, варианты исполнения: ISAH4140, ISAH4240, ISAH4340, ISAH4440, ISAH4540, ISAH415, ISAH425, ISAH435, ISAH445, ISAH455, ISAH417, ISAH427, ISAH437, ISAH447, ISAH457, ISAH5140, ISAH5240, ISAH5340, ISAH5440, ISAH5540, ISAH515, ISAH525, ISAH535, ISAH545, ISAH555, ISAH517, ISAH527, ISAH537, ISAH547, ISAH557, ISAH6140, ISAH6240, ISAH6340, ISAH6440, ISAH6540, ISAH615, ISAH625, ISAH635, ISAH645, ISAH655, ISAH617, ISAH627, ISAH637, ISAH647, ISAH657, ISAH7140, ISAH7240, ISAH7340, ISAH7440, ISAH7540, ISAH715, ISAH725, ISAH735, ISAH745, ISAH755 – 1 шт./уп.
24. Абатмент цементируемый типа SCRP, варианты исполнения: ISAS4140, ISAS4240, ISAS4340, ISAS4440, ISAS4540, ISAS415, ISAS425, ISAS435, ISAS445, ISAS455, ISAS417, ISAS427, ISAS437, ISAS447, ISAS457, ISAS5140, ISAS5240, ISAS5340, ISAS5440, ISAS5540, ISAS515, ISAS525, ISAS535, ISAS545, ISAS555, ISAS517, ISAS527, ISAS537, ISAS547, ISAS557, ISAS6140, ISAS6240, ISAS6340, ISAS6440, ISAS6540, ISAS615, ISAS625, ISAS635, ISAS645, ISAS655, ISAS617, ISAS627, ISAS637, ISAS647, ISAS657, ISAS7140, ISAS7240, ISAS7340, ISAS7440, ISAS7540, ISAS715, ISAS725, ISAS735, ISAS745, ISAS755 – 1 шт./уп.
25. Аналог имплантата лабораторный, варианты исполнения: ISLA400, ISLA500, ISLA440, ISLA455, ISLA470, ISLA540, ISLA555, ISLA570, ISLA640, ISLA655, ISLA670, ISLA740, ISLA755, ISLA770, ISLA500O – 1 шт./уп.
26. Аналог лабораторный Multi Unit: MUALA48 – 1 шт./уп.
27. Аналог лабораторный навигационный, варианты исполнения: SGISLA400, SGISLA500 – 1 шт./уп.
28. Аналог лабораторный шаровидного абатмента: BALA350 – 1 шт./уп.
29. Блок титановый IS DM Ti Block с шестигранником, варианты исполнения: ISBKH10DMD, ISBKH14DMD – 1 шт./уп.
30. Блок титановый IS DM Ti Block без шестигранника: ISBKN10DMD – 1 шт./уп.

31. Блок титановый IS OS Ti Block с шестигранником, варианты исполнения: ISBKH10OSD, ISBKH14OSD, ISBKH10OSMD – 1 шт./уп.
32. Блок титановый IS OS Ti Block без шестигранника, варианты исполнения: ISBKN10OSD, ISBKN10OSMD – 1 шт./уп.
33. Блок титановый IS Ti Block с шестигранником, варианты исполнения: ISBKH10NBD, ISBKH14NBD – 1 шт./уп.
34. Блок титановый IS Ti Block без шестигранника: ISBKN10NBD – 1 шт./уп.
35. Винт абатмента, варианты исполнения: ISCS20, ISCS20OS, ISCS20COS, ISCS20DM, ISAMUAS20, ISCS16OSM – 1 шт./уп.
36. Винт для Multi Unit Abutment Cylinder: MUAS14 – 1 шт./уп.
37. Винт для оттискового колпачка, варианты исполнения: ISPCIS20, ISPCIS16, EBPCIS16, EBPCIS20, EBPCIS25 – 1 шт./уп.
38. Винт для трансфера Multi Unit Abutment: MUAIPS48 – 1 шт./уп.
39. Винт для трансфера слепочного, варианты исполнения: ISPIS20, ISPISL20, ISTIS20H, ISTISL20H – 1 шт./уп.
40. Винт для устройства для извлечения имплантатов, варианты исполнения: FRS14, FRS16, FRS18, FRS172, FRS20, FRS25 – 1 шт./уп.
41. Втулка хирургическая направляющая для шаблона, варианты исполнения: SGS55N, SGS70RW, CSGS70RW – 1 шт./уп.
42. Держатель абатмента IS Multi Unit углового: AMUAH35 – 1 шт./уп.
43. Колпачок для оттиска, варианты исполнения: PCISC01, PCILC01 – 1 шт./уп., PCISC0110S, PCILC0110S – 10 шт./уп.
44. Колпачок пластиковый для слепочного трансфера, варианты исполнения: ISPIC411, ISPIC511, ISPIC611, ISPIC711 – 1 шт./уп.
45. Колпачок пластиковый, варианты исполнения: ISPCN410, ISPCN510, ISPCN610, ISPCN710 – 1 шт./уп.
46. Кольцо клиническое для шаровидного абатмента: BAORING – 3 шт./уп.
47. Матрица для фиксации абатмента: BAH40 – 1 шт./уп.
48. Платформа IS OS Mini Link с шестигранником: ISLKH4035OSM – 1 шт./уп.
49. Трансфер оттисковый, варианты исполнения: ISPCIB3503C, ISPCIB3505C, ISPCIB3508C, ISPCIB3510C, ISPCIB4003C, ISPCIB4005C, ISPCIB4008C, ISPCIB4010C, ISPCIB403C, ISPCIB405C, ISPCIB408C, ISPCIB410C, ISOSPCI403C, ISOSPCI405C, ISSNPCI3505C, ISSNPCI3507C, ISPCIB502C, ISPCIB503C, ISPCIB504C, ISPCIB505C, ISPCIB506C, ISPCIB602C, ISPCIB603C, ISPCIB604C, ISPCIB605C, ISPCIB606C, ISPCIB702C, ISPCIB703C, ISPCIB704C, ISPCIB705C, ISPCIB706C, ISOSPCI503C, ISOSPCI505C, EBPCIBN403C, EBPCIBN405C, EBPCIBR403C, EBPCIBR405C, EBPCIBR503C, EBPCIBR505C, ITPCIB503C, ITPCIB703C – 1 шт./уп.
50. Трансфер слепочный с шестигранником, варианты исполнения: ISITH411O, ISITH511O, ISITH611O, ISITH411, ISITH511, ISITH611, ISITHL411, ISITHL511, ISITHL611 – 1 шт./уп.
51. Трансфер слепочный без шестигранника, варианты исполнения: ISITN411, ISITN511, ISITN611, ISITNL411, ISITNL511, ISITNL611 – 1 шт./уп.
52. Трансфер слепочный для закрытой ложки Multi Unit Abutment: MUAIT48 – 1 шт./уп.
53. Трансфер слепочный для открытой ложки Multi Unit Abutment: MUAIP48 – 1 шт./уп.

54. Трансфер слепочный, варианты исполнения: ISIPH411O, ISIPH511O, ISIPH611O, ISIPH400, ISIPH450, ISIPH411, ISIPH511, ISIPH611, ISIPN400, ISIPN450, ISIPN411, ISIPN511, ISIPN611, ISIPS400, ISIPS450, ISIPS411, ISIPS511, ISIPS611, ISIPHL400, ISIPHL450, ISIPHL411, ISIPHL511, ISIPHL611, ISIPNL400, ISIPNL450, ISIPNL411, ISIPNL511, ISIPNL611, ISIPSL400, ISIPSL450, ISIPSL411, ISIPSL511, ISIPSL611 – 1 шт./уп.
55. Фиксатор шаровидного абатмента: BAR20 – 1 шт./уп.
56. Цилиндр IS титановый без шестигранника, варианты исполнения: ISTCAN4509, ISTCAN5509 – 1 шт./уп.
57. Цилиндр IS титановый с шестигранником, варианты исполнения: ISTCAN4509, ISTCAN5509 – 1 шт./уп.
58. Цилиндр Multi Unit CCM: MUACCN48 – 1 шт./уп.
59. Цилиндр Multi Unit временный: MUATPCN48 – 1 шт./уп.

II. Инструкция по применению

Далее по тексту – изделие, абатмент, трансфер, компоненты.

2. Сведения о разработчике, производителе и уполномоченном представителе

Разработчик

Neobiotech Co., Ltd. («Необайотек Ко., Лтд.»)

#104, 24/#102, 103, 104-1, 104-2, 105, 106, 205, 212, 306, 312, 509, 510, 511, 608, 704, 708, 710 & 10F, 36, Digital-ro 27gil, Guro-gu, Seoul, 08381, Korea

(№ 104, 24/№ 102, 103, 104-1, 104-2, 105, 106, 205, 212, 306, 312, 509, 510, 511, 608, 704, 708, 710 и 10 этаж, 36, Диджитал-ро 27гил, Куро-гу, Сеул, 08381, Корея)

Тел.: +82 2 582 2885

Эл. почта: info@neobiotech.com

Производитель

Neobiotech Co., Ltd.

#104, 24/#102, 103, 104-1, 104-2, 105, 106, 205, 212, 306, 312, 509, 510, 511, 608, 704, 708, 710 & 10F, 36, Digital-ro 27gil, Guro-gu, Seoul, 08381, Korea

Тел.: +82 2 582 2885

Эл. почта: info@neobiotech.com

Производственные площадки

Neobiotech Co., Ltd.

1. #104, 24/#102, 103, 104-1, 104-2, 105, 106, 205, 212, 306, 312, 509, 510, 511, 608, 704, 708, 710 & 10F, 36, Digital-ro 27gil, Guro-gu, Seoul, 08381, Korea

2. 1F, 60, Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08589, Korea

Уполномоченный представитель производителя в Российской Федерации

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАВ ДЕНТАЛЬ»

Юр. адрес: 127015, город Москва, улица Вятская, дом 49, строение 2, Э 2 ПОМ I КОМ 60

Телефон +7 (499) 652-77-10; эл. почта: info@gl-dent.ru

3. Назначение изделия с указанием потенциального потребителя, область применения

3.1. Назначение изделия

Изделия предназначены для соединения (фиксации) имплантатов с протезными/реставрационными конструкциями (единичной коронкой, мостовидным или

съемным протезом).

3.2. Потенциальные потребители и область применения

Врачи-стоматологи-хирурги, врачи-челюстно-лицевые хирурги и врачи-хирурги-имплантологи.

Область применения: дентальная имплантология, челюстно-лицевая хирургия.

4. Показания, противопоказания и возможные побочные эффекты, связанные с применением медицинского изделия по назначению

Показания:

Используется в стоматологии для реставраций при потере одного зуба, при частичной или полной потере зубов или уже существующем эдентулизме в верхней и нижней челюсти посредством изготовления соответствующего костного ложа для челюстной кости.

В кости любой плотности и в следующих клинических ситуациях:

- Отсутствие одного или нескольких зубов, а также полная адентия
- Посттравматические и постоперационные дефекты челюстных костей

При соответствующих костных характеристиках (плотность, ширина и высота кости):

- Единичные зубные протезы на промежутках от резцов до премоляров
- Мостовидный протез на челюсти, как полностью, так и частично лишенной зубов
- Жесткое крепление протезов посредством балок и систем шариковой фиксации

Противопоказания:

- Прохождение лучевой терапии для лечения злокачественной опухоли
- Пациенты, имеющие проблемы с соотношением челюстей и окклюзией
- Пациенты с инфекцией полости рта или воспалением (несоответствующая гигиена полости рта, бруксизм, ксеростомия)
- Беременные, курящие пациенты, пациенты с психическими расстройствами, например, злоупотребляющие алкоголем, наркотиками, пациенты с заболеваниями центральной и периферической нервной системы.
- Заболевания крови и кроветворных органов или декомпенсированные заболевания сердечно-сосудистой системы
- Аллергия на составляющие изделий
- Общие пародонтальные и хирургические основания для отказа от любого вмешательства

Возрастные ограничения существуют только для молодых людей не достигших 18 лет. Это связано с тем, что у них еще не закончен рост костной ткани и формирование прикуса.

Возможные побочные эффекты:

- Могут возникать осложнения, например, неправильный прикус, парестезия в результате неврологического повреждения, инфекция, травма или повреждение других зубов или кровеносных сосудов, отек, гиподермальное кровотечение, дискомфорт и боль, язва мягких тканей.

- Ослабление винта имплантата, образование трещины в имплантате или протезе.
- Дефект костной ткани вокруг имплантата и мукозит.

5. Меры предосторожности

- Предварительно тщательно исследовать состояние пациентов с заболеваниями костной ткани (остеопороз, остеопения) или нарушениями костного обмена.
- Не использовать изделия повторно.
- Утилизировать вскрытые изделия, даже если они не использовались.
- Утилизировать упаковку использованного изделия.
- Процедуру имплантации может проводить только стоматолог, прошедший специальное обучение и практику. Решение о возможности или невозможности проведения операции дентальной имплантации принимает только врач.
- Перед проведением имплантации врач должен полностью освоить методику, которую будет применять. Кроме этого он должен выбрать наиболее подходящий вид имплантатов. Неправильный подход к пациенту и неправильное применение методов могут служить причинами неудачной имплантации зубов или потери прочности костей вокруг имплантатов.
- Пациентам, которые обладают излишней силой укуса зубами нужно ставить имплантат с достаточной толщиной и длиной, чтобы предотвратить перелом имплантата.
- Заявление о МР-совместимости. Данное изделие не проходило оценку безопасности и совместимости для использования в МР среде. Оно не проходило испытания на нагрев, смещение и артефакты изображения в МР среде. Безопасность изделия в МР среде неизвестна. Сканирование пациента, которому установлено изделие, может вести к травмированию пациента.
- Данное изделие является нестерильным медицинским изделием. Перед его применением необходимо провести стерилизацию.

6. Порядок применения

Блок титановый

1. С помощью сканера получают цифровую модель ротовой полости пациента.
2. Данные сканирования и цифровую модель зуба сравнивают с графическим изображением и анализируют с целью оптимизации.
3. На основе этих данных с помощью компьютерного 3D-моделирования создают дизайн абатмента.
4. С помощью программного обеспечения САМ получают данные цифрового управления.
5. Блок устанавливают на оборудование системы CAD/CAM, а затем изготавливают изделие.
6. Размер блока не должен быть меньше установленного размера, а угол наклона не должен превышать 30 градусов (ограничение: диаметр 4 мм, манжета 1,00 мм, столбик: ниже 4 мм).
7. Абатмент устанавливают на имплантат с помощью винта или зубного цемента, а затем фиксируют с помощью имплантовода размером 30 Нсм.

Втулка хирургическая направляющая для шаблона

1. Подготовить напечатанную на 3D-принтере втулку, подходящую по размеру для отверстия хирургической направляющей.
2. Нанести клеящее вещество на наружную поверхность втулки и прикрепить ее к отверстию хирургической направляющей.
3. После перемещения направляющей зубного имплантата в ротовую полость пациента вставить сверло в отверстие втулки и следовать обычной процедуре вживления зубного имплантата.

Абатменты, цилиндры

1. Проверить состояние остеоинтеграции между костью и зубным имплантатом.
2. Выбрать подходящий размер и угол абатмента, чтобы учесть степень фиксации и анатомические условия.
3. Выбрать подходящую отвертку в соответствии с формой винта.
4. Перед использованием простерилизовать медицинские изделия паром под высоким давлением при температуре 132°C в течение не менее 4 мин., продолжительность сушки: 30 мин.
5. Стерильное изделие следует поместить в хирургический лоток, чтобы избежать любого контакта с посторонними веществами.
6. Использовать отвертку соответствующего размера и проверить соединение между абатментом и отверткой.
7. Установить изделие на имплантат, соблюдая рекомендованный момент затяжки 30 Нсм. Для наконечника рекомендуется низкоскоростная фиксация.
8. Отметить область удаления десны и вертикальной области.
9. Сформировать область десны и вертикальное пространство при помощи сверла с достаточным орошением.
10. Проверить наличие неисправностей с помощью другой отвертки.
11. Далее ортопедические работы.

Пластиковый абатмент UCLA

1. Использовать в случаях ограничений из-за доступа, косметической процедуры или пространства.
2. Изготовление дорогостоящего протеза из стоматологического сплава (золото, недрагоценный металл) после нанесения воска.

Кольцо O-ring

Вставить уплотнительное кольцо в корпус или фиксатор, а затем использовать.

Трансфер слепочный, трансфер оттискный, лабораторный аналог.

Перед использованием:

1. Перед использованием изделия врач должен оценить состояние, характеристики и функции изделия.
2. Использовать только после устранения каких-либо сомнений и проверки любых проблем с производителем.
3. Для проведения процедуры сначала должен быть составлен план на основе состояния ротовой полости пациента и точных медицинских заключений.
4. После оценки состояния пациента необходимо подготовить соответствующие инструменты согласно процедуре.
5. Перед использованием убедиться, что изделие установлено в правильном месте. Рабочая модель не может быть изготовлена, если лабораторный аналог был удален или изменен.
6. Перед использованием простерилизовать медицинские изделия паром под высоким давлением при температуре 132°C в течение не менее 4 мин., продолжительность сушки: 30 мин. Лабораторный аналог и пластиковые коронки не стерилизовать!

На уровне имплантата:

1. После прикрепления слепочного трансфера к имплантату прикрепите винт, используя шестигранную отвертку. После этого проверьте с помощью рентгеновского снимка, а затем получите слепок.
2. Отделите тело слепка и соедините лабораторный аналог со слепочным трансфером.
3. Введите материал для воссоздания ткани.
4. Поместите слепок в емкость и введите гипс, чтобы завершить модель.
5. Прикрепите абатмент к готовой рабочей модели и отрегулируйте высоту и другие характеристики, прежде чем сделать коронку из моделировочной пластмассы.
6. После нанесения воска изготовьте окончательную коронку.

На уровне абатмента:

1. Получите слепок, присоединив слепочный колпачок к абатменту одним касанием.
2. Отделите тело слепка и соедините лабораторный аналог со слепочным колпачком.
3. Введите материал для воссоздания ткани.
4. Поместите слепок в емкость и введите гипс, чтобы завершить модель.
5. Прикрепите абатмент к готовой рабочей модели и отрегулируйте высоту и другие характеристики, прежде чем сделать коронку из моделировочной пластмассы.
6. После нанесения воска изготовьте окончательную коронку.

7. Описание изделия, принцип действия

Общее описание

Изделия представляют собой верхние части стоматологических систем имплантатов EB, IS, IT, а также системы ССМ цилиндр-имплантат, изготовленные из различных материалов в качестве сырья. Абатмент, винты и т.д. используются в качестве опоры или поддержки реставрации после установки субструктуры имплантата. В качестве методики крепления абатмента и фиксаторов протеза используется цементирование или винтовая фиксация. Конструкция элементов сопряжения абатмента соответствует таковой имплантатов для точного прилегания и легкого соединения «Имплантат-абатмент».

Соединение

Соединение IS



① Зубной протез соединяется с абатментом с поперечным сечением для предотвращения вращения протеза при помощи цемента. Имеет выпуклую и вогнутую форму для расширения адгезионной поверхности.


② Шестигранный тип: этот тип имеет шестигранную конструкцию, которая может соединяться с имплантатом.

Не шестигранный тип: этот тип имеет не шестигранную конструкцию, которая может соединяться с имплантатом.

SCRП: этот тип имеет структуру SCRП (комбинированный тип фиксации протезов - цементно-винтовой (Screw & Cement Retained Protheses-SCRП)), которая может соединяться с имплантатом.

Соединение IS OS

Шестигранный

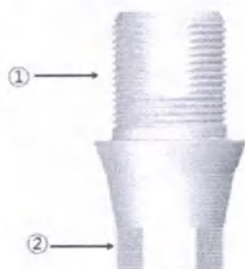

Не шестигранный




① Зубной протез соединяется с абатментом с поперечным сечением для предотвращения вращения протеза при помощи цемента. Имеет выпуклую и вогнутую форму для расширения адгезионной поверхности.

② Шестигранный тип: этот тип имеет шестигранную конструкцию, которая может соединяться с имплантатом.


Не шестигранный тип: этот тип имеет не шестигранную конструкцию, которая может соединяться с имплантатом.

Соединение IS DM

Шестигранный

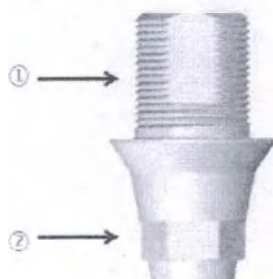

Не шестигранный

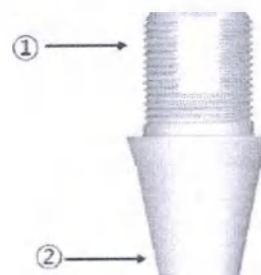


① Зубной протез соединяется с абатментом с поперечным сечением для предотвращения вращения протеза при помощи цемента. Имеет выпуклую и вогнутую форму для расширения адгезионной поверхности.

② Шестигранный тип: этот тип имеет шестигранную конструкцию, которая может соединяться с имплантатом.

Не шестигранный тип: этот тип имеет не шестигранную конструкцию, которая может соединяться с имплантатом.

8. Основные размеры

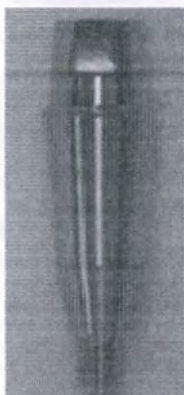

8.1. Абатмент IS-монокристаллический: ISAE4140, ISAE4240, ISAE4340, ISAE4440, ISAE4540, ISAE415, ISAE425, ISAE435, ISAE445, ISAE455, ISAE417, ISAE427, ISAE437, ISAE447, ISAE457, ISAE5140, ISAE5240, ISAE5340, ISAE5440, ISAE5540, ISAE515, ISAE525, ISAE535, ISAE545, ISAE555, ISAE517, ISAE527, ISAE537, ISAE547, ISAE557, ISAE6140, ISAE6240, ISAE6340, ISAE6440, ISAE6540, ISAE615, ISAE625, ISAE635, ISAE645, ISAE655, ISAE617, ISAE627, ISAE637, ISAE647, ISAE657, ISAE7240, ISAE7340, ISAE715, ISAE725, ISAE735, ISAE745, ISAE755

Таблица 1. Абатмент IS-монокристаллический: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			
		Ø макс.	Длина	Длина коронковой части	Ø резьбы
1.	ISAE4140	4,5	11,1	4,0	1,95
2.	ISAE4240	4,5	12,1	4,0	1,95
3.	ISAE4340	4,5	13,1	4,0	1,95
4.	ISAE4440	4,5	14,1	4,0	1,95
5.	ISAE4540	4,5	15,1	4,0	1,95
6.	ISAE415	4,5	12,6	5,5	1,95
7.	ISAE425	4,5	13,6	5,5	1,95
8.	ISAE435	4,5	14,6	5,5	1,95
9.	ISAE445	4,5	15,6	5,5	1,95
10.	ISAE455	4,5	16,6	5,5	1,95
11.	ISAE417	4,5	14,1	7,0	1,95
12.	ISAE427	4,5	15,1	7,0	1,95
13.	ISAE437	4,5	16,1	7,0	1,95
14.	ISAE447	4,5	17,1	7,0	1,95
15.	ISAE457	4,5	18,1	7,0	1,95
16.	ISAE5140	5,2	11,1	4,0	1,95
17.	ISAE5240	5,2	12,1	4,0	1,95
18.	ISAE5340	5,2	13,1	4,0	1,95
19.	ISAE5440	5,2	14,1	4,0	1,95
20.	ISAE5540	5,2	15,1	4,0	1,95
21.	ISAE515	5,2	12,6	5,5	1,95
22.	ISAE525	5,2	13,6	5,5	1,95
23.	ISAE535	5,2	14,6	5,5	1,95
24.	ISAE545	5,2	15,6	5,5	1,95
25.	ISAE555	5,2	16,6	5,5	1,95
26.	ISAE517	5,2	14,1	7,0	1,95
27.	ISAE527	5,2	15,1	7,0	1,95
28.	ISAE537	5,2	16,1	7,0	1,95

29.	ISAE547	5,2	17,1	7,0	1,95
30.	ISAE557	5,2	18,1	7,0	1,95
31.	ISAE6140	5,7	11,1	4,0	1,95
32.	ISAE6240	5,7	12,1	4,0	1,95
33.	ISAE6340	5,7	13,1	4,0	1,95
34.	ISAE6440	5,7	14,1	4,0	1,95
35.	ISAE6540	5,7	15,1	4,0	1,95
36.	ISAE615	5,7	12,6	5,5	1,95
37.	ISAE625	5,7	13,6	5,5	1,95
38.	ISAE635	5,7	14,6	5,5	1,95
39.	ISAE645	5,7	15,6	5,5	1,95
40.	ISAE655	5,7	16,6	5,5	1,95
41.	ISAE617	5,7	14,1	7,0	1,95
42.	ISAE627	5,7	15,1	7,0	1,95
43.	ISAE637	5,7	16,1	7,0	1,95
44.	ISAE647	5,7	17,1	7,0	1,95
45.	ISAE657	5,7	18,1	7,0	1,95
46.	ISAE7240	6,5	12,1	4,0	1,95
47.	ISAE7340	6,5	13,1	4,0	1,95
48.	ISAE715	6,5	12,6	5,5	1,95
49.	ISAE725	6,5	13,6	5,5	1,95
50.	ISAE735	6,5	14,6	5,5	1,95
51.	ISAE745	6,5	15,6	5,5	1,95
52.	ISAE755	6,5	16,6	5,5	1,95

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.2. Абатмент IS Multi Unit прямой с держателем: ISMUA4810S, ISMUA4820S, ISMUA4830S, ISMUA4840S

Таблица 2. Абатмент IS Multi Unit прямой с держателем: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			
		Ø макс.	Ø резьбы	Длина	Ø шестигранника
1.	ISMUA4810S	4,8	1,95	9,7	2,0
2.	ISMUA4820S	4,8	1,95	10,7	2,0
3.	ISMUA4830S	4,8	1,95	11,7	2,0
4.	ISMUA4840S	4,8	1,95	12,7	2,0

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

Держатель абатмента IS Multi Unit прямого.

Таблица 3. Держатель абатмента IS Multi Unit: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Длина	Ø1	Ø2
1.	MUAH48	20,0	6,0	4,8

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.3. Абатмент IS Multi Unit угловой с шестигранником, с держателем ISAHMUA1410S, ISAHMUA1420S, ISAHMUA1430S, ISAHMUA1440S, ISAHMUA3410S, ISAHMUA3420S, ISAHMUA3430S, ISAHMUA3440S

Таблица 4. Абатмент IS Multi Unit угловой с шестигранником, с держателем: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм					
		Ø платформы 1	Ø макс.	Длина угловой части	Угол (°)	Длина	Ø платформы 2
1	ISAHMUA1410S**	3,43	4,8	1,0	17	7,14	2,5
2	ISAHMUA1420S**	3,43	4,8	2,0	17	8,14	2,5
3	ISAHMUA1430S**	3,43	4,8	3,0	17	9,14	2,5
4	ISAHMUA1440S**	3,43	4,8	4,0	17	10,14	2,5
5	ISAHMUA3410S**	3,43	4,8	1,0	30	7,69	2,5
6	ISAHMUA3420S**	3,43	4,8	2,0	30	8,69	2,5
7	ISAHMUA3430S**	3,43	4,8	3,0	30	9,69	2,5
8	ISAHMUA3440S**	3,43	4,8	4,0	30	10,69	2,5

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

** - используется с винтом ISAMUAS20

Держатель абатмента IS Multi Unit углового с шестигранником.

Таблица 5. Держатель абатмента IS Multi Unit углового с шестигранником: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Длина	Ø ₁	Ø ₂
1	AMUAH35	22,0	3,5	1,25



8.4. Абатмент IS Multi Unit угловой с держателем ISANMUA1410S, ISANMUA1420S, ISANMUA1430S, ISANMUA1440S, ISANMUA3410S, ISANMUA3420S, ISANMUA3430S, ISANMUA3440S

Таблица 6. Абатмент IS Multi Unit угловой с держателем: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм				
		Ø платформы	Ø макс.	Длина угловой части	Угол (°)	Длина
1	ISANMUA1410S**	3,43	4,8	1,0	17	7,14
2	ISANMUA1420S***	3,43	4,8	2,0	17	8,14
3	ISANMUA1430S**	3,43	4,8	3,0	17	9,14
4	ISANMUA1440S**	3,43	4,8	4,0	17	10,14
5	ISANMUA3410S**	3,43	4,8	1,0	30	7,69
6	ISANMUA3420S**	3,43	4,8	2,0	30	8,69
7	ISANMUA3430S**	3,43	4,8	3,0	30	9,69
8	ISANMUA3440S**	3,43	4,8	4,0	30	10,69

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

** - используется с винтом ISAMUAS20



8.5. Цилиндр Multi Unit временный: MUATPCN48

Таблица 7. Цилиндр Multi Unit временный: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина коронковой части	Длина
1	MUATPCN48	4,8	3,0	11,0

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.6. Цилиндр Multi Unit CCM: MUACCN48

Таблица 8. Цилиндр Multi Unit CCM: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина	Длина выжигаемой части
1	MUACCN48	4,8	11,0	9,0

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.7. Винт для Multi Unit Abutment Cylinder: MUAS14

Таблица 9. Винт для Multi Unit Abutment Cylinder: MUAS14: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина	Ø резьбы
1	MUAS14	2,3	4,1	1,35

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.8. Абатмент IS OS: ISAH415O, ISAH425O, ISAH435O, ISAH445O, ISAH455O, ISAH514O, ISAH524O, ISAH534O, ISAH544O, ISAH554O, ISAH515O, ISAH525O, ISAH535O, ISAH545O, ISAH555O, ISAH517O, ISAH527O, ISAH537O, ISAH547O, ISAH557O, ISAH614O, ISAH624O, ISAH634O, ISAH644O, ISAH654O, ISAH615O, ISAH625O, ISAH635O, ISAH645O, ISAH655O, ISAH617O, ISAH627O, ISAH637O, ISAH647O, ISAH657O

Таблица 10. Абатмент IS OS: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			
		Ø макс.	Длина коронковой части	Длина	Ø шестигранника
1.	ISAH415O	4,5	5,5	9,0	2,48
2.	ISAH425O	4,5	5,5	10,0	2,48
3.	ISAH435O	4,5	5,5	11,0	2,48
4.	ISAH445O	4,5	5,5	12,0	2,48
5.	ISAH455O	4,5	5,5	13,0	2,48
6.	ISAH514O	5,2	4,5	8,0	2,48
7.	ISAH524O	5,2	4,5	9,0	2,48
8.	ISAH534O	5,2	4,5	10,0	2,48
9.	ISAH544O	5,2	4,5	11,0	2,48
10.	ISAH554O	5,2	4,5	12,0	2,48
11.	ISAH515O	5,2	5,5	9,0	2,48
12.	ISAH525O	5,2	5,5	10,0	2,48
13.	ISAH535O	5,2	5,5	11,0	2,48
14.	ISAH545O	5,2	5,5	12,0	2,48
15.	ISAH555O	5,2	5,5	13,0	2,48
16.	ISAH517O	5,2	7,0	10,5	2,48
17.	ISAH527O	5,2	7,0	11,5	2,48
18.	ISAH537O	5,2	7,0	12,5	2,48
19.	ISAH547O	5,2	7,0	13,5	2,48
20.	ISAH557O	5,2	7,0	14,5	2,48
21.	ISAH614O	5,7	4,5	8,0	2,48
22.	ISAH624O	5,7	4,5	9,0	2,48
23.	ISAH634O	5,7	4,5	10,0	2,48
24.	ISAH644O	5,7	4,5	11,0	2,48
25.	ISAH654O	5,7	4,5	12,0	2,48
26.	ISAH615O	5,7	5,5	9,0	2,48
27.	ISAH625O	5,7	5,5	10,0	2,48
28.	ISAH635O	5,7	5,5	11,0	2,48
29.	ISAH645O	5,7	5,5	12,0	2,48
30.	ISAH655O	5,7	5,5	13,0	2,48
31.	ISAH617O	5,7	7,0	10,5	2,48

32.	ISAH6270	5,7	7,0	11,5	2,48
33.	ISAH6370	5,7	7,0	12,5	2,48
34.	ISAH6470	5,7	7,0	13,5	2,48
35.	ISAH6570	5,7	7,0	14,5	2,48

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.9. Абатмент цементируемый с шестигранником: ISAH4140, ISAH4240, ISAH4340, ISAH4440, ISAH4540, ISAH415, ISAH425, ISAH435, ISAH445, ISAH455, ISAH417, ISAH427, ISAH437, ISAH447, ISAH457, ISAH5140, ISAH5240, ISAH5340, ISAH5440, ISAH5540, ISAH515, ISAH525, ISAH535, ISAH545, ISAH555, ISAH517, ISAH527, ISAH537, ISAH547, ISAH557, ISAH6140, ISAH6240, ISAH6340, ISAH6440, ISAH6540, ISAH615, ISAH625, ISAH635, ISAH645, ISAH655, ISAH617, ISAH627, ISAH637, ISAH647, ISAH657, ISAH7140, ISAH7240, ISAH7340, ISAH7440, ISAH7540, ISAH715, ISAH725, ISAH735, ISAH745, ISAH755.

Таблица 11. Абатмент цементируемый с шестигранником: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			
		Ø макс.	Длина	Длина коронковой части	Ø шестигранника
1	ISAH4140	4,5	8,0	4,0	2,5
2	ISAH4240	4,5	9,0	4,0	2,5
3	ISAH4340	4,5	10,0	4,0	2,5
4	ISAH4440	4,5	11,0	4,0	2,5
5	ISAH4540	4,5	12,0	4,0	2,5
6	ISAH415	4,5	9,5	5,5	2,5
7	ISAH425	4,5	10,5	5,5	2,5
8	ISAH435	4,5	11,5	5,5	2,5
9	ISAH445	4,5	12,5	5,5	2,5
10	ISAH455	4,5	13,5	5,5	2,5
11	ISAH417	4,5	11,0	7,0	2,5
12	ISAH427	4,5	12,0	7,0	2,5
13	ISAH437	4,5	13,0	7,0	2,5
14	ISAH447	4,5	14,0	7,0	2,5
15	ISAH457	4,5	15,0	7,0	2,5
16	ISAH5140	5,2	8,0	4,0	2,5
17	ISAH5240	5,2	9,0	4,0	2,5
18	ISAH5340	5,2	10,0	4,0	2,5
19	ISAH5440	5,2	11,0	4,0	2,5
20	ISAH5540	5,2	12,0	4,0	2,5
21	ISAH515	5,2	9,5	5,5	2,5
22	ISAH525	5,2	10,5	5,5	2,5
23	ISAH535	5,2	11,5	5,5	2,5
24	ISAH545	5,2	12,5	5,5	2,5
25	ISAH555	5,2	13,5	5,5	2,5
26	ISAH517	5,2	11,0	7,0	2,5
27	ISAH527	5,2	12,0	7,0	2,5
28	ISAH537	5,2	13,0	7,0	2,5
29	ISAH547	5,2	14,0	7,0	2,5
30	ISAH557	5,2	15,0	7,0	2,5

31	ISAH6140	5,7	8,0	4,0	2,5
32	ISAH6240	5,7	9,0	4,0	2,5
33	ISAH6340	5,7	10,0	4,0	2,5
34	ISAH6440	5,7	11,0	4,0	2,5
35	ISAH6540	5,7	12,0	4,0	2,5
36	ISAH615	5,7	9,5	5,5	2,5
37	ISAH625	5,7	10,5	5,5	2,5
38	ISAH635	5,7	11,5	5,5	2,5
39	ISAH645	5,7	12,5	5,5	2,5
40	ISAH655	5,7	13,5	5,5	2,5
41	ISAH617	5,7	11,0	7,0	2,5
42	ISAH627	5,7	12,0	7,0	2,5
43	ISAH637	5,7	13,0	7,0	2,5
44	ISAH647	5,7	14,0	7,0	2,5
45	ISAH657	5,7	15,0	7,0	2,5
46	ISAH7140	6,5	8,0	4,0	2,5
47	ISAH7240	6,5	9,0	4,0	2,5
48	ISAH7340	6,5	10,0	4,0	2,5
49	ISAH7440	6,5	11,0	4,0	2,5
50	ISAH7540	6,5	12,0	4,0	2,5
51	ISAH715	6,5	9,5	5,5	2,5
52	ISAH725	6,5	10,5	5,5	2,5
53	ISAH735	6,5	11,5	5,5	2,5
54	ISAH745	6,5	12,5	5,5	2,5
55	ISAH755	6,5	13,5	5,5	2,5

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.10. Абатмент цементируемый без шестигранника: ISAN4140, ISAN4240, ISAN4340, ISAN4440, ISAN4540, ISAN415, ISAN425, ISAN435, ISAN445, ISAN455, ISAN417, ISAN427, ISAN437, ISAN447, ISAN457, ISAN5140, ISAN5240, ISAN5340, ISAN5440, ISAN5540, ISAN515, ISAN525, ISAN535, ISAN545, ISAN555, ISAN517, ISAN527, ISAN537, ISAN547, ISAN557, ISAN6140, ISAN6240, ISAN6340, ISAN6440, ISAN6540, ISAN615, ISAN625, ISAN635, ISAN645, ISAN655, ISAN617, ISAN627, ISAN637, ISAN647, ISAN657, ISAN7140, ISAN7240, ISAN7340, ISAN7440, ISAN7540, ISAN715, ISAN725, ISAN735, ISAN745, ISAN755

Таблица 12. Абатмент цементируемый без шестигранника: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина	Длина коронковой части
1.	ISAN4140	4,5	8,0	4,0
2.	ISAN4240	4,5	9,0	4,0
3.	ISAN4340	4,5	10,0	4,0
4.	ISAN4440	4,5	11,0	4,0
5.	ISAN4540	4,5	12,0	4,0
6.	ISAN415	4,5	9,5	5,5
7.	ISAN425	4,5	10,5	5,5
8.	ISAN435	4,5	11,5	5,5
9.	ISAN445	4,5	12,5	5,5
10.	ISAN455	4,5	13,5	5,5

Инструкция по применению на медицинское изделие (Версия 2):

Компоненты для протезирования для имплантатов дентальных Neobiotech

Страница 17 из 49

11.	ISAN417	4,5	11,0	7,0
12.	ISAN427	4,5	12,0	7,0
13.	ISAN437	4,5	13,0	7,0
14.	ISAN447	4,5	14,0	7,0
15.	ISAN457	4,5	15,0	7,0
16.	ISAN5140	5,2	8,0	4,0
17.	ISAN5240	5,2	9,0	4,0
18.	ISAN5340	5,2	10,0	4,0
19.	ISAN5440	5,2	11,0	4,0
20.	ISAN5540	5,2	12,0	4,0
21.	ISAN515	5,2	9,5	5,5
22.	ISAN525	5,2	10,5	5,5
23.	ISAN535	5,2	11,5	5,5
24.	ISAN545	5,2	12,5	5,5
25.	ISAN555	5,2	13,5	5,5
26.	ISAN517	5,2	11,0	7,0
27.	ISAN527	5,2	12,0	7,0
28.	ISAN537	5,2	13,0	7,0
29.	ISAN547	5,2	14,0	7,0
30.	ISAN557	5,2	15,0	7,0
31.	ISAN6140	5,7	8,0	4,0
32.	ISAN6240	5,7	9,0	4,0
33.	ISAN6340	5,7	10,0	4,0
34.	ISAN6440	5,7	11,0	4,0
35.	ISAN6540	5,7	12,0	4,0
36.	ISAN615	5,7	9,5	5,5
37.	ISAN625	5,7	10,5	5,5
38.	ISAN635	5,7	11,5	5,5
39.	ISAN645	5,7	12,5	5,5
40.	ISAN655	5,7	13,5	5,5
41.	ISAN617	5,7	11,0	7,0
42.	ISAN627	5,7	12,0	7,0
43.	ISAN637	5,7	13,0	7,0
44.	ISAN647	5,7	14,0	7,0
45.	ISAN657	5,7	15,0	7,0
46.	ISAN7140	6,5	8,0	4,0
47.	ISAN7240	6,5	9,0	4,0
48.	ISAN7340	6,5	10,0	4,0
49.	ISAN7440	6,5	11,0	4,0
50.	ISAN7540	6,5	12,0	4,0
51.	ISAN715	6,5	9,5	5,5
52.	ISAN725	6,5	10,5	5,5
53.	ISAN735	6,5	11,5	5,5
54.	ISAN745	6,5	12,5	5,5
55.	ISAN755	6,5	13,5	5,5

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.11. Абатмент цементируемый типа SCRP: ISAS4140, ISAS4240, ISAS4340, ISAS4440, ISAS4540, ISAS415, ISAS425, ISAS435, ISAS445, ISAS455, ISAS417, ISAS427, ISAS437, ISAS447, ISAS457, ISAS5140, ISAS5240, ISAS5340, ISAS5440, ISAS5540, ISAS515, ISAS525, ISAS535, ISAS545, ISAS555, ISAS517, ISAS527, ISAS537, ISAS547, ISAS557, ISAS6140, ISAS6240, ISAS6340, ISAS6440, ISAS6540, ISAS615, ISAS625, ISAS635, ISAS645, ISAS655, ISAS617, ISAS627, ISAS637, ISAS647, ISAS657, ISAS7140, ISAS7240, ISAS7340, ISAS7440, ISAS7540, ISAS715, ISAS725, ISAS735, ISAS745, ISAS755

Таблица 13. Абатмент цементируемый типа SCRP: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			
		Ø макс.	Длина	Длина коронковой части	Ø шестигранника
1.	ISAS4140	4,5	8,0	4,0	2,5
2.	ISAS4240	4,5	9,0	4,0	2,5
3.	ISAS4340	4,5	10,0	4,0	2,5
4.	ISAS4440	4,5	11,0	4,0	2,5
5.	ISAS4540	4,5	12,0	4,0	2,5
6.	ISAS415	4,5	9,5	5,5	2,5
7.	ISAS425	4,5	10,5	5,5	2,5
8.	ISAS435	4,5	11,5	5,5	2,5
9.	ISAS445	4,5	12,5	5,5	2,5
10.	ISAS455	4,5	13,5	5,5	2,5
11.	ISAS417	4,5	11,0	7,0	2,5
12.	ISAS427	4,5	12,0	7,0	2,5
13.	ISAS437	4,5	13,0	7,0	2,5
14.	ISAS447	4,5	14,0	7,0	2,5
15.	ISAS457	4,5	15,0	7,0	2,5
16.	ISAS5140	5,2	8,0	4,0	2,5
17.	ISAS5240	5,2	9,0	4,0	2,5
18.	ISAS5340	5,2	10,0	4,0	2,5
19.	ISAS5440	5,2	11,0	4,0	2,5
20.	ISAS5540	5,2	12,0	4,0	2,5
21.	ISAS515	5,2	9,5	5,5	2,5
22.	ISAS525	5,2	10,5	5,5	2,5
23.	ISAS535	5,2	11,5	5,5	2,5
24.	ISAS545	5,2	12,5	5,5	2,5
25.	ISAS555	5,2	13,5	5,5	2,5
26.	ISAS517	5,2	11,0	7,0	2,5
27.	ISAS527	5,2	12,0	7,0	2,5
28.	ISAS537	5,2	13,0	7,0	2,5
29.	ISAS547	5,2	14,0	7,0	2,5
30.	ISAS557	5,2	15,0	7,0	2,5
31.	ISAS6140	5,7	8,0	4,0	2,5
32.	ISAS6240	5,7	9,0	4,0	2,5
33.	ISAS6340	5,7	10,0	4,0	2,5
34.	ISAS6440	5,7	11,0	4,0	2,5
35.	ISAS6540	5,7	12,0	4,0	2,5
36.	ISAS615	5,7	9,5	5,5	2,5
37.	ISAS625	5,7	10,5	5,5	2,5

38.	ISAS635	5,7	11,5	5,5	2,5
39.	ISAS645	5,7	12,5	5,5	2,5
40.	ISAS655	5,7	13,5	5,5	2,5
41.	ISAS617	5,7	11,0	7,0	2,5
42.	ISAS627	5,7	12,0	7,0	2,5
43.	ISAS637	5,7	13,0	7,0	2,5
44.	ISAS647	5,7	14,0	7,0	2,5
45.	ISAS657	5,7	15,0	7,0	2,5
46.	ISAS7140	6,5	8,0	4,0	2,5
47.	ISAS7240	6,5	9,0	4,0	2,5
48.	ISAS7340	6,5	10,0	4,0	2,5
49.	ISAS7440	6,5	11,0	4,0	2,5
50.	ISAS7540	6,5	12,0	4,0	2,5
51.	ISAS715	6,5	9,5	5,5	2,5
52.	ISAS725	6,5	10,5	5,5	2,5
53.	ISAS735	6,5	11,5	5,5	2,5
54.	ISAS745	6,5	12,5	5,5	2,5
55.	ISAS755	6,5	13,5	5,5	2,5

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.12. Абатмент фрезеруемый с шестигранником: ISSH428, ISSH448, ISSH528, ISSH548, ISSH628, ISSH648, ISSH728, ISSH748

Таблица 14. Абатмент фрезеруемый с шестигранником: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина	Ø шестигранника
1	ISSH428	4,5	13,0	2,5
2	ISSH448	4,5	15,0	2,5
3	ISSH528	5,2	13,0	2,5
4	ISSH548	5,2	15,0	2,5
5	ISSH628	5,7	13,0	2,5
6	ISSH648	5,7	15,0	2,5
7	ISSH728	6,5	13,0	2,5
8	ISSH748	6,5	15,0	2,5

* -
Предель

ное отклонение $\pm 1\%$



8.13. Абатмент IS Link с шестигранником: ISH4035NB, ISLKH4535NB

Таблица 15. Абатмент IS Link с шестигранником: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			
		Ø макс.	Длина коронковой части	Длина	Ø шестигранника
1	ISLKH4035NB	4,0	3,5	7,5	2,5
2	ISLKH4535NB	4,5	3,5	7,5	2,5

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$




8.14. Абатмент IS Link без шестигранника: ISLK4035NB, ISLKN4535NB

Таблица 16. Абатмент IS Link без шестигранника: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина коронковой части	Длина
1	ISLKN4035NB	4,0	3,5	7,5
2	ISLKN4535NB	4,5	3,5	7,5

*Предельное отклонение $\pm 1\%$

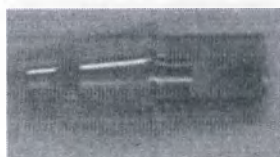

8.15. Абатмент IS Link типа SCRP: ISLKS4035NB, ISLKS4535NB

Таблица 17. Абатмент IS Link типа SCRP: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			
		Ø макс.	Длина коронковой части	Длина	Ø шестигранника
1	ISLKS4035NB	4,0	3,5	7,5	2,5
2	ISLKS4535NB	4,5	3,5	7,5	2,5

* -

Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.16. Цилиндр IS титановый с шестигранником: ISTCAN4509, ISTCAN5509

Таблица 18. Цилиндр IS титановый с шестигранником: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			
		Ø макс.	Длина коронковой части	Длина	Ø шестигранника
1	ISTCAN4509	4,5	9,0	13,5	2,5
	ISTCAN5509	5,5	9,0	13,5	2,5

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.17. Цилиндр IS титановый без шестигранника: ISTCAN4509, ISTCAN5509

Таблица 19. Цилиндр IS титановый без шестигранника: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина коронковой части	Длина
1	ISTCAN4509	4,5	9,0	13,5
2	ISTCAN5509	5,5	9,0	13,5

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.18. Платформа IS OS Mini Link с шестигранником: ISLKH4035OSM

Таблица 20. Платформа IS OS Mini Link с шестигранником: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			
		Ø макс.	Длина коронковой части	Длина	Ø шестигранника
1	ISLKH4035OSM	4,0	3,5	7,25	2,08

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.19. Блок титановый IS Ti Block с шестигранником: ISBKH10NBD, ISBKH14NBD

Таблица 21. Блок титановый IS Ti Block с шестигранником: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			
		Ø внутр. резьбы	Длина	Ø макс.	Ø шестигранника
1	ISBKH10NBD	2,35	29,1	10,0	2,5
2	ISBKH14NBD	2,35	29,1	14,0	2,5

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.20. Блок титановый IS Ti Block без шестигранника: ISBKN10NBD

Таблица 22. Блок титановый IS Ti Block без шестигранника: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø внутр. резьбы	Длина	Ø макс.
1	ISBKN10NBD	2,35	29,1	10,0

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.21. Блок титановый IS DM Ti Block с шестигранником:
ISBKH10DMD, ISBKH14DMD

Таблица 23. Блок титановый IS DM Ti Block с шестигранником: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			
		Ø внутр. резьбы	Длина	Ø макс.	Ø шестигранника
1	ISBKH10DMD	2,33	28,9	10,0	2,49
2	ISBKH14DMD	2,33	28,9	14,0	2,49

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$




8.22. Блок титановый IS DM Ti Block без шестигранника:
ISBKN10DMD

Таблица 24. Блок титановый IS DM Ti Block с шестигранником: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø внутр. резьбы	Длина	Ø макс.
1	ISBKN10DMD	2,33	28,9	10,0

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

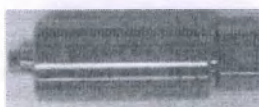

8.23. Блок титановый IS OS Ti Block с шестигранником: ISBKH100
SMD, ISBKH100SD, ISBKH140SD

Таблица 25. Блок титановый IS OS Ti Block с шестигранником: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			
		Ø внутр. резьбы	Длина	Ø макс.	Ø шестигранника
1	ISBKH100SMD	2,3	28,78	10,0	2,08
2	ISBKH100SD	2,4	28,7	10,0	2,48
3	ISBKH140SD	2,4	28,7	14,0	2,48

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.24. Блок титановый IS OS Ti Block без шестигранника: ISBKN100
SMD, ISBKN100SD

Таблица 26. Блок титановый IS OS Ti Block без шестигранника: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø внутр. резьбы	Длина	Ø макс.
1	ISBKN100SMD	2,3	28,18	10,0
2	ISBKN100SD	2,4	28,7	10,0

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.25. Абатмент IS угловой А-типа: ISAHA1427, ISAHA1437, ISAH A1447, ISAHA1527, ISAHA1537, ISAHA1547, ISAHA1627, ISAHA1 637, ISAHA1647, ISAHA2427, ISAHA2437, ISAHA2447, ISAHA252 7, ISAHA2537, ISAHA2547, ISAHA2627, ISAHA2637, ISAHA2647

Таблица 27. Абатмент IS угловой А-типа: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм				
		Ø макс.	Длина	Длина коронковой части	Ø шестигранника	угол (°)
1	ISAHA1427	4,5	12,0	7,0	2,5	15
2	ISAHA1437	4,5	13,0	7,0	2,5	15
3	ISAHA1447	4,5	14,0	7,0	2,5	15
4	ISAHA1527	5,2	12,0	7,0	2,5	15
5	ISAHA1537	5,2	13,0	7,0	2,5	15
6	ISAHA1547	5,2	14,0	7,0	2,5	15
7	ISAHA1627	5,7	12,0	7,0	2,5	15
8	ISAHA1637	5,7	13,0	7,0	2,5	15
9	ISAHA1647	5,7	14,0	7,0	2,5	15
10	ISAHA2427	4,5	12,0	7,0	2,5	25
11	ISAHA2437	4,5	13,0	7,0	2,5	25
12	ISAHA2447	4,5	14,0	7,0	2,5	25
13	ISAHA2527	5,2	12,0	7,0	2,5	25
14	ISAHA2537	5,2	13,0	7,0	2,5	25
15	ISAHA2547	5,2	14,0	7,0	2,5	25
16	ISAHA2627	5,7	12,0	7,0	2,5	25
17	ISAHA2637	5,7	13,0	7,0	2,5	25
18	ISAHA2647	5,7	14,0	7,0	2,5	25

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.26. Абатмент IS угловой В-типа: ISAHB1427, ISAHB1437, ISAH B1447, ISAHB1527, ISAHB1537, ISAHB1547, ISAHB1627, ISAHB 1637, ISAHB1647, ISAHB2427, ISAHB2437, ISAHB2447, ISAHB2 527, ISAHB2537, ISAHB2547, ISAHB2627, ISAHB2637, ISAHB26 47

Таблица 28. Абатмент IS угловой В-типа: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм				
		Ø макс.	Длина	Длина коронковой части	Ø шестигранника	угол (°)
1	ISAHB1427	4,5	12,0	7,0	2,5	15
2	ISAHB1437	4,5	13,0	7,0	2,5	15
3	ISAHB1447	4,5	14,0	7,0	2,5	15

4	ISAHB1527	5,2	12,0	7,0	2,5	15
5	ISAHB1537	5,2	13,0	7,0	2,5	15
6	ISAHB1547	5,2	14,0	7,0	2,5	15
7	ISAHB1627	5,7	12,0	7,0	2,5	15
8	ISAHB1637	5,7	13,0	7,0	2,5	15
9	ISAHB1647	5,7	14,0	7,0	2,5	15
10	ISAHB2427	4,5	12,0	7,0	2,5	25
11	ISAHB2437	4,5	13,0	7,0	2,5	25
12	ISAHB2447	4,5	14,0	7,0	2,5	25
13	ISAHB2527	5,2	12,0	7,0	2,5	25
14	ISAHB2537	5,2	13,0	7,0	2,5	25
15	ISAHB2547	5,2	14,0	7,0	2,5	25
16	ISAHB2627	5,7	12,0	7,0	2,5	25
17	ISAHB2637	5,7	13,0	7,0	2,5	25
18	ISAHB2647	5,7	14,0	7,0	2,5	25

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.27. Абатмент IS угловой без шестигранника: ISANA1427, ISANA1437, ISANA1447, ISANA1527, ISANA1537, ISANA1547, ISANA1627, ISANA1637, ISANA1647, ISANA2427, ISANA2437, ISANA2447, ISANA2527, ISANA2537, ISANA2547, ISANA2627, ISANA2637, ISANA2647

Таблица 29. Абатмент IS угловой без шестигранника: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			
		Ø макс.	Длина	Длина коронковой части	угол (°)
1	ISANA1427	4,5	12,0	7,0	15
2	ISANA1437	4,5	13,0	7,0	15
3	ISANA1447	4,5	14,0	7,0	15
4	ISANA1527	5,2	12,0	7,0	15
5	ISANA1537	5,2	13,0	7,0	15
6	ISANA1547	5,2	14,0	7,0	15
7	ISANA1627	5,7	12,0	7,0	15
8	ISANA1637	5,7	13,0	7,0	15
9	ISANA1647	5,7	14,0	7,0	15
10	ISANA2427	4,5	12,0	7,0	25
11	ISANA2437	4,5	13,0	7,0	25
12	ISANA2447	4,5	14,0	7,0	25
13	ISANA2527	5,2	12,0	7,0	25
14	ISANA2537	5,2	13,0	7,0	25
15	ISANA2547	5,2	14,0	7,0	25
16	ISANA2627	5,7	12,0	7,0	25
17	ISANA2637	5,7	13,0	7,0	25
18	ISANA2647	5,7	14,0	7,0	25

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.28. Абатмент IS шаровидный: ISABA100, ISABA200, ISABA300, ISABA400

Таблица 30. Абатмент IS шаровидный: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина коронковой части	Длина
1	ISABA100	3,5	4,1	11,1
2	ISABA200	3,5	4,1	12,1
3	ISABA300	3,5	4,1	13,1
4	ISABA400	3,5	4,1	14,1

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.29. Фиксатор BAR20

Таблица 31. Фиксатор BAR20: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм	
		Ø	Высота
1	BAR20	5,0	2,0

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.30. Матрица для фиксации абатмента: BAN40

Таблица 32. Матрица для фиксации абатмента: BAN40: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм	
		Ø макс	Высота
1	BAN40	5,0	4,0

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.31. Кольцо клиническое для шаровидного абатмента BAORING

Таблица 33. Кольцо клиническое для шаровидного абатмента BAORING: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм	
		Ø макс.	Ø мин.
1	BAORING	4,6	1,5

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.32. Уплотнительное лабораторное кольцо (составная часть фиксатора BAR20 и матрицы BAN40)

Таблица 34. Уплотнительное лабораторное кольцо (составная часть фиксатора BAR20 и матрицы BAN40): размеры

№ п.п.	Размер, мм	
	Ø макс	Ø мин
1	4,7	4,5

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.33. Абатмент выжигаемый IS CCM UCLA UCLA с шестигранником: ISUCH400

Таблица 35. Абатмент выжигаемый IS CCM UCLA UCLA с шестигранником: ISUCH400: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			
		Ø макс.	Длина	Длина коронковой части	Ø шестигранника
1	ISUCH400	4,5	14,0	10,0	2,5

Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.34. Абатмент выжигаемый IS CCM UCLA без шестигранника: ISUCN400

Таблица 36. Абатмент выжигаемый IS CCM UCLA без шестигранника: ISUCN400: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина	Длина коронковой части
1	ISUCN400	4,5	14,0	10,0

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.35. Абатмент выжигаемый IS CCM UCLA типа SCRP: ISUCS400

Таблица 37. Абатмент выжигаемый IS CCM UCLA типа SCRP: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			
		Ø макс.	Длина	Длина коронковой части	Ø шестигранника
1	ISUCS400	4,5	14,0	10,0	2,5

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.36. Абатмент временный IS с шестигранником: ISANT460, ISANT480, ISANT560, ISANT580, ISANT4130

Таблица 38. Абатмент временный IS с шестигранником: размеры


№ п.п.	Артикул	Размер, мм			
		Ø макс.	Высота платформы	Длина	Ø шестигранника
1	ISANT460	4,5	5,1	11,1	2,5
2	ISANT480	4,5	5,1	13,1	2,5
3	ISANT560	5,2	5,1	11,1	2,5
4	ISANT580	5,2	5,1	13,1	2,5

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

Таблица 39. Абатмент временный IS с шестигранником: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			
		Ø макс.	Высота платформы	Длина	Ø шестигранника
1	ISANT4130	4,5	4,6	16,1	2,5

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

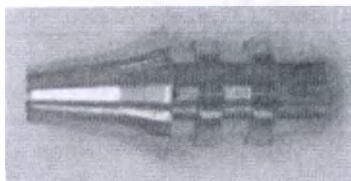

8.37. Абатмент временный IS без шестигранника: ISANT460, ISANT480, ISANT560, ISANT580, ISANT4130

Таблица 40. Абатмент временный IS без шестигранника: размеры


№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Высота платформы	Длина
1	ISANT460	4,5	5,1	11,1
2	ISANT480	4,5	5,1	13,1
3	ISANT560	5,2	5,1	11,1
4	ISANT580	5,2	5,1	13,1

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

Таблица 41. Абатмент временный IS без шестигранника: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Высота платформы	Длина
1	ISANT4130	4,5	4,6	16,1

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

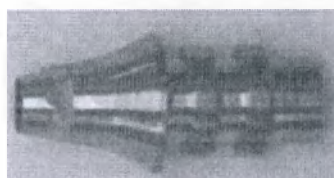

8.38. Абатмент временный IS типа SCRP: ISAST460, ISAST480, ISAST4130

Таблица 42. Абатмент временный IS типа SCRP: размеры


№ п.п.	Артикул	Размер, мм			
		Ø макс.	Высота платформы	Длина	Ø шестигранника
1	ISAST460	4,5	5,1	11,1	2,5
2	ISAST480	4,5	5,1	13,1	2,5

- Предельное отклонение $\pm 1\%$

Таблица 43. Абатмент временный IS типа SCRP: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			
		Ø макс.	Высота платформы	Длина	Ø шестигранника
1	ISAST4130	4,5	4,6	16,1	2,5

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

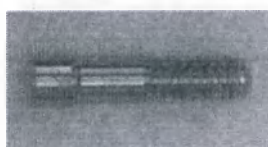

8.39. Винт абатмента: ISCS20

Таблица 44. Винт абатмента: ISCS20: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм	
		Длина	Диаметр
1	ISCS20	8,8	2,3

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.40. Винт абатмента: ISCS20OS

Таблица 45. Винт абатмента: ISCS20OS: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина	Ø резьбы
1	ISCS20OS	2,35	8,35	1,95

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.41. Винт абатмента: ISCS20COS

Таблица 46. Винт абатмента: ISCS20COS: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина	Ø мин.
1	ISCS20COS	2,3	8,3	1,95

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.42. Винт абатмента: ISCS20DM

Таблица 47. Винт абатмента: ISCS20DM: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина	Ø резьбы
1	ISCS20DM	2,3	10,2	1,95

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.43. Винт абатмента углового IS Multi Unit: ISAMUAS20

Таблица 48. Винт абатмента углового IS Multi Unit: ISAMUAS20: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина	Ø резьбы
1	ISAMUAS20	2,3	8,3	1,95

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.44. Винт абатмента: ISCS16OSM

Таблица 49. Винт абатмента: ISCS16OSM: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина	Ø резьбы
1	ISCS16OSM	2,25	10,2	1,55

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.45. Трансфер слепочный: ISIPH411O, ISIPH511O, ISIPH611O, ISIPH400, ISIPH450, ISIPH411, ISIPH511, ISIPH611, ISIPN400, ISIPN450, ISIPN411, ISIPN511, ISIPN611, ISIPS400, ISIPS450, ISIPS411, ISIPS511, ISIPS611, ISIPHL400, ISIPHL450, ISIPHL411, ISIPHL511, ISIPHL611, ISIPNL400, ISIPNL450, ISIPNL411, ISIPNL511, ISIPNL611, ISIPSL400, ISIPSL450, ISIPSL411, ISIPSL511, ISIPSL611

Таблица 50. Трансфер слепочный: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина	Ø шестигранника
1	ISIPH411O	4,8	14,5	2,48
2	ISIPH511O	5,5	14,5	2,48
3	ISIPH611O	6,0	14,5	2,48

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

Таблица 51. Трансфер слепочный: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина	Ø шестигранника
1.	ISIPH400	4,0	14,7	2,5
2.	ISIPH450	4,5	14,7	2,5
3.	ISIPH411	4,8	14,7	2,5
4.	ISIPH511	5,5	14,7	2,5
5.	ISIPH611	6,0	14,7	2,5
6.	ISIPHL400	4,0	17,7	2,5
7.	ISIPHL450	4,5	17,7	2,5
8.	ISIPHL411	4,8	17,7	2,5
9.	ISIPHL511	5,5	17,7	2,5
10.	ISIPHL611	6,0	17,7	2,5

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

Таблица 52. Трансфер слепочный: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм	
		Ø макс.	Длина
1.	ISIPN400	4,0	14,7
2.	ISIPN450	4,5	14,7
3.	ISIPN411	4,8	14,7
4.	ISIPN511	5,5	14,7
5.	ISIPN611	6,0	14,7
6.	ISIPNL400	4,0	17,7
7.	ISIPNL450	4,5	17,7
8.	ISIPNL411	4,8	17,7
9.	ISIPNL511	5,5	17,7
10.	ISIPNL611	6,0	17,7

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

Таблица 53. Трансфер слепочный: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина	Ø шестигранника
1.	ISIPS400	4,0	14,7	2,5

Инструкция по применению на медицинское изделие (Версия 2):

Компоненты для протезирования для имплантатов дентальных Neobiotech

Страница 31 из 49

2.	ISIPS450	4,5	14,7	2,5
3.	ISIPS411	4,8	14,7	2,5
4.	ISIPS511	5,5	14,7	2,5
5.	ISIPS611	6,0	14,7	2,5
6.	ISIPSL400	4,0	17,7	2,5
7.	ISIPSL450	4,5	17,7	2,5
8.	ISIPSL411	4,8	17,7	2,5
9.	ISIPSL511	5,5	17,7	2,5
10.	ISIPSL611	6,0	17,7	2,5

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.46. Винт для трансфера слепочного: ISIPIS20, ISIPISL20

Таблица 54. Винт для трансфера слепочного: ISIPIS20, ISIPISL20: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм	
		Длина	Ø макс.
1	ISIPIS20	21,5	2,3
	ISIPISL20	24,5	2,3

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.47. Винт для трансфера слепочного: ISTIS20H, ISTISL20H

Таблица 55. Винт для трансфера слепочного: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Длина	Ø резьбы	Ø шестигранника
1	ISTIS20H	19.0	1.95	1,2
2	ISTISL20H	22.0	1.95	1,2

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.48. Трансфер слепочный с шестигранником: ISITH411, ISITH511, ISITH611, ISITHL411, ISITHL511, ISITHL611, ISITH411O, ISITH511O, ISITH611O;

Трансфер слепочный без шестигранника: ISITN411, ISITN511, ISITN611, ISITNL411, ISITNL511, ISITNL611

Таблица 56. Трансфер слепочный: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина	Ø шестигранника
1	ISITH411O	4,8	14,7	2,48
2	ISITH511O	5,5	14,7	2,48
3	ISITH611O	6,0	14,7	2,48

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

Таблица 57. Трансфер слепочный: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина	Ø шестигранника
1	ISITH411	4,8	14,7	2,5
2	ISITH511	5,5	14,7	2,5
3	ISITH611	6,0	14,7	2,5

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

Таблица 58. Трансфер слепочный: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм	
		Ø макс.	Длина
1	ISITN411	4,8	14,7
2	ISITN511	5,5	14,7
3	ISITN611	6,0	14,7

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

Таблица 59. Трансфер слепочный: размеры


№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина	Ø шестигранника
1	ISITHL411	4,8	17,7	2,5
2	ISITHL511	5,5	17,7	2,5
3	ISITHL611	6,0	17,7	2,5

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

Таблица 60. Трансфер слепочный: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм	
		Ø макс.	Длина
1	ISITNL411	4,8	17,7
2	ISITNL511	5,5	17,7
3	ISITNL611	6,0	17,7

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

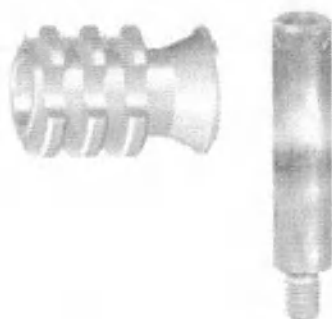

8.49. Трансфер слепочный для открытой ложки
Multi Unit Abutment: MUAIP48

Таблица 61. Трансфер слепочный для открытой ложки Multi Unit Abutment: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм				
		Длина	Ø ₁ трансфера	Ø ₂ трансфера	Ø резьбы винта	Длина винта
1	MUAIP48	9,0	4,8	5,3	1,35	13,05

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.50. Трансфер слепочный для закрытой ложки Multi Unit Abutment: MUAIT48

Таблица 62. Трансфер слепочный для закрытой ложки Multi Unit Abutment: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм	
		Длина	Ø макс.
1	MUAIT48	9,0	4,8

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$




8.51. Винт для трансфера Multi Unit Abutment: MUAIPS48

Таблица 63. Винт для трансфера Multi Unit Abutment: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Длина	Ø резьбы	Ø макс.
1	MUAIPS48	13,05	1,35	2,3

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

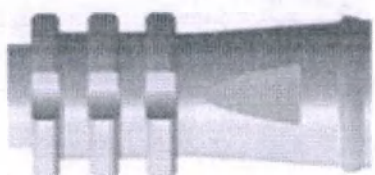

8.52. Колпачок пластиковый для слепочного трансфера: ISPIC411, ISPIC511, ISPIC611, ISPIC711

Таблица 64. Колпачок пластиковый для слепочного трансфера: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø	Длина	Цвет
1	ISPIC411	5,0	12,6	желтый
2	ISPIC511	5,7	12,6	зеленый
3	ISPIC611	6,2	12,6	синий
4	ISPIC711	7,0	12,6	фиолетовый

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.53. Аналог имплантата лабораторный: ISLA400, ISLA500

Таблица 65. Аналог имплантата лабораторный: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина	Ø шестигранника
1	ISLA400	3,8	12,0	2,5
2	ISLA500	4,3	12,0	2,5

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$




8.54. Аналог имплантата лабораторный: ISLA440, ISLA455, ISLA470, ISLA540, ISLA555, ISLA570, ISLA640, ISLA655, ISLA670, ISLA740, ISLA755, ISLA770

Таблица 66. Аналог имплантата лабораторный: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина	Длина коронковой части
1.	ISLA440	4,5	17,1	4,0
2.	ISLA455	4,5	18,6	5,5
3.	ISLA470	4,5	20,1	7,0
4.	ISLA540	5,2	17,1	4,0
5.	ISLA555	5,2	18,6	5,5
6.	ISLA570	5,2	20,1	7,0
7.	ISLA640	5,7	17,1	4,0
8.	ISLA655	5,7	18,6	5,5
9.	ISLA670	5,7	20,1	7,0
10.	ISLA740	6,5	17,1	4,0
11.	ISLA755	6,5	18,6	5,5
12.	ISLA770	6,5	20,1	7,0

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

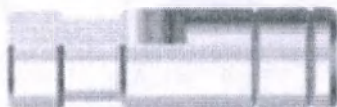

8.55. Аналог имплантата лабораторный: ISLA500O

Таблица 67. Аналог имплантата лабораторный: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина	Ø шестигранника
1	ISLA500O	4,3	12,0	2,5

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.56. Аналог лабораторный Multi Unit: MUALA48

Таблица 68. Аналог лабораторный Multi Unit: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм	
		Длина	Ø макс.
1	MUALA48	14,2	4,8

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.57. Аналог лабораторный шаровидного абатмента: BALA350

Таблица 69. Аналог лабораторный шаровидного абатмента: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина шаровидной части	Длина
1	BALA350	3,5	3,6	17,1

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.58. Аналог лабораторный навигационный:
SGISLA400, SGISLA500

Таблица 70. Аналог лабораторный навигационный: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Длина	Ø	Ø шестигранника
1	SGISLA400	12,0	3,8	2,5
2	SGISLA500	12,0	4,3	2,5

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.59. Абатмент пластиковый UCLA
с шестигранником: ISUPH400, ISUPH500

Таблица 71. Абатмент пластиковый UCLA с шестигранником: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ø макс.	Длина	Ø шестигранника
1	ISUPH400	4,5	13,4	2,5
2	ISUPH500	5,2	13,4	2,5

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.60. Абатмент пластиковый UCLA без
шестигранника: ISUPN400, ISUPN500

Таблица 72. Абатмент пластиковый UCLA без шестигранника: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм	
		Ø макс.	Длина
1	ISUPN400	4,5	13,4
2	ISUPN500	5,2	13,4

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.61. Колпачок пластиковый: ISPCH410, ISPCH510, IS
PCH610, ISPCH710, ISPCN410, ISPCN510, ISPCN610, I
SPCN710

Таблица 73. Колпачок пластиковый: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм	
		Ø макс.	Длина
1	ISPCН410	4,94	11,75
2	ISPCН510	5,64	11,75
3	ISPCН610	6,14	11,75
4	ISPCН710	6,96	11,75

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

Таблица 74. Колпачок пластиковый: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм	
		Ø макс.	Длина
1	ISPCN410	4,94	11,75
2	ISPCN510	5,64	11,75
3	ISPCN610	6,14	11,75
4	ISPCN710	6,96	11,75

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.62. Держатель абатмента IS Multi Unit углового: AM UAH35

Таблица 75. Держатель абатмента IS Multi Unit углового: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Длина	Ø макс.	Ø мин.
1	AMUAH35	22,0	3,5	1,25

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.63. Втулка хирургическая направляющая для шаблона: SGS55N, SGS70RW, CSGS70RW

Таблица 76. Втулка хирургическая направляющая для шаблона: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			Цвет
		Высота	Ø макс.	Ширина	
1	SGS55N	3,5	5,5	4,7	желтый
2	SGS70RW	3,5	7,0	5,8	зеленый

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

Таблица 77. Втулка хирургическая направляющая для шаблона: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			Цвет
		Высота	Ø макс.	Ширина	
1	CSGS70RW	3,5	6,7	5,8	зеленый

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.64. Винт для устройства для извлечения имплантатов: FRS14, FRS16, FRS18, FRS172, FRS20, FRS25

Таблица 78. Винт для устройства для извлечения имплантатов: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Длина	Ø мин. резьбы	Ø шестигранника
1	FRS14	15,5	1,4	1,61
2	FRS16	15,5	1,6	1,61
3	FRS18	15,5	1,8	1,61
4	FRS172	15,5	1,85	1,61
5	FRS20	15,5	2,0	1,61
6	FRS25	14,7	2,5	1,61

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.65. Колпачок для оттиска: PCISC01, PCILC01, PCISC0110S, PCILC0110S

Таблица 79. Колпачок для оттиска: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм		
		Ширина внутр. части	Высота	Диаметр
1	PCISC01, PCISC0110S	2,65	4,4	5,25
2	PCILC01, PCILC0110S	3,45	4,4	6,6

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.66. Винт для оттискового колпачка: ISPCIS20

Таблица 80. Винт для оттискового колпачка: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм	
		Длина	Ø резьбы
1	ISPCIS20	7,0	1,95

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.67. Винт для оттискового колпачка: ISPCIS16

Таблица 81. Винт для оттискового колпачка: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм	
		Длина	Ø резьбы
1	ISPCIS16	9,2	1,55

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.68. Винт для оттискового колпачка: EBPCIS16, EBPCIS20, EBPCIS25

Таблица 82. Винт для оттискового колпачка: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм	
		Длина	Ø резьбы
1	EBPCIS16	7,0	1,55
2	EBPCIS20	7,0	1,95
3	EBPCIS25	7,0	2,47

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

8.69. Трансфер оттисковый: ISPCIB3503C, ISPCIB3505C, ISPCIB3508C, ISPCIB3510C, ISPCIB4003C, ISPCIB4005C, ISPCIB4008C, ISPCIB4010C, ISPCIB403C, ISPCIB405C, ISPCIB408C, ISPCIB410C, ISPCIB502C, ISPCIB503C, ISPCIB504C, ISPCIB505C, ISPCIB506C, ISPCIB602C, ISPCIB603C, ISPCIB604C, ISPCIB605C, ISPCIB606C, ISPCIB702C, ISPCIB703C, ISPCIB704C, ISPCIB705C, ISPCIB706C

Таблица 83. Трансфер оттисковый: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			Цвет
		Длина	Ø макс.	Ø шестигранника	
1.	ISPCIB3503C	10,0	3,6	2,5	голубой
2.	ISPCIB3505C	12,0	3,6	2,5	зеленый
3.	ISPCIB3508C	15,0	3,6	2,5	голубой
4.	ISPCIB3510C	17,0	3,6	2,5	зеленый
5.	ISPCIB4003C	10,0	4,1	2,5	желтый
6.	ISPCIB4005C	12,0	4,1	2,5	фиолетовый
7.	ISPCIB4008C	15,0	4,1	2,5	желтый
8.	ISPCIB4010C	17,0	4,1	2,5	фиолетовый
9.	ISPCIB403C	10,0	4,6	2,5	голубой
10.	ISPCIB405C	12,0	4,6	2,5	зеленый
11.	ISPCIB408C	15,0	4,6	2,5	голубой
12.	ISPCIB410C	17,0	4,6	2,5	зеленый

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

Таблица 84. Трансфер оттисковый: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			Цвет
		Длина	Ø макс.	Ø шестигранника	
1.	ISPCIB502C	9,2	5,3	2,5	желтый
2.	ISPCIB503C	10,2	5,3	2,5	фиолетовый
3.	ISPCIB504C	11,2	5,3	2,5	желтый
4.	ISPCIB505C	12,2	5,3	2,5	фиолетовый
5.	ISPCIB506C	13,2	5,3	2,5	желтый
6.	ISPCIB602C	9,2	5,8	2,5	голубой
7.	ISPCIB603C	10,2	5,8	2,5	зеленый
8.	ISPCIB604C	11,2	5,8	2,5	голубой
9.	ISPCIB605C	12,2	5,8	2,5	зеленый
10.	ISPCIB606C	13,2	5,8	2,5	голубой
11.	ISPCIB702C	9,2	6,6	2,5	желтый

12.	ISPCIB703C	10,2	6,6	2,5	фиолетовый
13.	ISPCIB704C	11,2	6,6	2,5	желтый
14.	ISPCIB705C	12,2	6,6	2,5	фиолетовый
15.	ISPCIB706C	13,2	6,6	2,5	желтый

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.70. Трансфер оттисковый: ISSNPCI3505C, ISSNPCI3507C

Таблица 85. Трансфер оттисковый: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			Цвет
		Длина	Ø макс.	Ø шестигранника	
1	ISSNPCI3505C	11,6	3,6	2,08	зеленый
2	ISSNPCI3507C	13,6	3,6	2,08	голубой

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.71. Трансфер оттисковый ISOSPCI503C, ISOSPCI505C, ISOSPCI403C, ISOSPCI405C

Таблица 86. Трансфер оттисковый: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			Цвет
		Длина	Ø макс.	Ø шестигранника	
1	ISOSPCI403C	10,1	4,6	2,48	голубой
2	ISOSPCI405C	12,1	4,6	2,48	зеленый
3	ISOSPCI503C	10,3	5,3	2,48	фиолетовый
4	ISOSPCI505C	12,3	5,3	2,48	фиолетовый

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



8.72. Трансфер оттисковый: EBPCIBN403C, EBPCIBN405C, EBPCIBR403C, EBPCIBR405C, EBPCIBR503C, EBPCIBR505C

Таблица 87. Трансфер оттисковый: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			Цвет
		Длина	Ø макс.	Ø шестигранника	
1	EBPCIBN403C	7,7	4,8	2,4	желтый
2	EBPCIBN405C	9,7	4,8	2,4	голубой
3	EBPCIBR403C	7,7	4,8	2,7	фиолетовый
4	EBPCIBR405C	9,7	4,8	2,7	зеленый
5	EBPCIBR503C	7,9	5,5	2,7	желтый
6	EBPCIBR505C	9,9	5,5	2,7	голубой

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$



Таблица 88. Трансфер оттисковый: размеры

№ п.п.	Артикул	Размер, мм			Цвет
		Длина	Ø макс.	Ø шестигранника	
1	ITPCIB503C	9,05	5,6	3,1	фиолетовый
2	ITPCIB703C	9,15	7,3	3,1	зеленый

* - Предельное отклонение $\pm 1\%$

Таблица 89. Физические характеристики

№ п.п.	Показатель	Нормативные требования
1	Предельная усталостная прочность	≥ 250 Н
2	Прочность на сжатие при сдвиге (прочность на излом)	≥ 600 Н

9. Перечень стандартов, которым соответствует медицинское изделие

Директива 93/42/EEC с поправками, внесенными 2007/47/EC, ISO 13485, EN ISO 14971, EN 1041, ISO 15223-1, ISO/IEC 17050-1, EN 1642, ISO 5832-3, ASTM F 136-13, ASTM F67-13, ASTM F1537, ISO 14801, ISO 10993-1, ISO 10993-5, ISO 10993-10, KS I ISO 14644-1, MEDDEV 2.7.1 Rev.4, KS Q ISO 2859-1.

Стандарты используются в последней редакции: организация сохраняет и обновляет список справочных стандартов как запись собственной системы управления в соответствии с ISO 13485.

10. Комплект поставки

№ п.п.	Вариант исполнения	Количество в упаковке
1.	I. Абатмент IS Link без шестигранника, варианты исполнения: ISLKN4035NB, ISLKN4535NB II. Инструкция по применению.	1 шт./уп.
2.	I. Абатмент IS Link с шестигранником, варианты исполнения: ISLKH4035NB, ISLKH4535NB II. Инструкция по применению.	1 шт./уп.
3.	I. Абатмент IS Link типа SCRP, варианты исполнения: ISLKS4035NB, ISLKS4535NB II. Инструкция по применению.	1 шт./уп.
4.	I. Абатмент IS Multi Unit прямой с держателем, варианты исполнения: ISMUA4810S, ISMUA4820S, ISMUA4830S,	1 шт./уп.

	ISMUA4840S	
	II. Инструкция по применению.	
5.	I. Абатмент IS Multi Unit угловой с держателем, варианты исполнения: ISANMUA1410S, ISANMUA1420S, ISANMUA1430S, ISANMUA1440S, ISANMUA3410S, ISANMUA3420S, ISANMUA3430S, ISANMUA3440S II. Инструкция по применению.	1 шт./уп.
6.	I. Абатмент IS Multi Unit угловой с шестигранником, с держателем, варианты исполнения: ISAHMUA1410S, ISAHMUA1420S, ISAHMUA1430S, ISAHMUA1440S, ISAHMUA3410S, ISAHMUA3420S, ISAHMUA3430S, ISAHMUA3440S II. Инструкция по применению.	1 шт./уп.
7.	I. Абатмент IS OS, варианты исполнения: ISAH415O, ISAH425O, ISAH435O, ISAH445O, ISAH455O, ISAH514O, ISAH524O, ISAH534O, ISAH544O, ISAH554O, ISAH515O, ISAH525O, ISAH535O, ISAH545O, ISAH555O, ISAH517O, ISAH527O, ISAH537O, ISAH547O, ISAH557O, ISAH614O, ISAH624O, ISAH634O, ISAH644O, ISAH654O, ISAH615O, ISAH625O, ISAH635O, ISAH645O, ISAH655O, ISAH617O, ISAH627O, ISAH637O, ISAH647O, ISAH657O II. Инструкция по применению.	1 шт./уп.
8.	I. Абатмент IS угловой В-типа, варианты исполнения: ISAHB1427, ISAHB1437, ISAHB1447, ISAHB1527, ISAHB1537, ISAHB1547, ISAHB1627, ISAHB1637, ISAHB1647, ISAHB2427, ISAHB2437, ISAHB2447, ISAHB2527, ISAHB2537, ISAHB2547, ISAHB2627, ISAHB2637, ISAHB2647 II. Инструкция по применению.	1 шт./уп.
9.	I. Абатмент IS угловой А-типа, варианты исполнения: ISAHA1427, ISAHA1437, ISAHA1447, ISAHA1527, ISAHA1537, ISAHA1547, ISAHA1627, ISAHA1637, ISAHA1647, ISAHA2427, ISAHA2437, ISAHA2447, ISAHA2527, ISAHA2537, ISAHA2547, ISAHA2627, ISAHA2637, ISAHA2647 II. Инструкция по применению.	1 шт./уп.
10.	I. Абатмент IS угловой без шестигранника, варианты исполнения: ISANA1427, ISANA1437, ISANA1447, ISANA1527, ISANA1537, ISANA1547, ISANA1627, ISANA1637, ISANA1647, ISANA2427, ISANA2437, ISANA2447, ISANA2527, ISANA2537, ISANA2547, ISANA2627, ISANA2637, ISANA2647 II. Инструкция по применению.	1 шт./уп.
11.	I. Абатмент IS шаровидный, варианты исполнения: ISABA100,	1 шт./уп.

	ISABA200, ISABA300, ISABA400	
	II. Инструкция по применению.	
12.	I. Абатмент IS-монолитный, варианты исполнения: ISAE4140, ISAE4240, ISAE4340, ISAE4440, ISAE4540, ISAE415, ISAE425, ISAE435, ISAE445, ISAE455, ISAE417, ISAE427, ISAE437, ISAE447, ISAE457, ISAE5140, ISAE5240, ISAE5340, ISAE5440, ISAE5540, ISAE515, ISAE525, ISAE535, ISAE545, ISAE555, ISAE517, ISAE527, ISAE537, ISAE547, ISAE557, ISAE6140, ISAE6240, ISAE6340, ISAE6440, ISAE6540, ISAE615, ISAE625, ISAE635, ISAE645, ISAE655, ISAE617, ISAE627, ISAE637, ISAE647, ISAE657, ISAE7240, ISAE7340, ISAE715, ISAE725, ISAE735, ISAE745, ISAE755	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
13.	I. Абатмент временный IS без шестигранника, варианты исполнения: ISANT460, ISANT480, ISANT560, ISANT580, ISANT4130	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
14.	I. Абатмент временный IS с шестигранником, варианты исполнения: ISANT460, ISANT480, ISANT560, ISANT580, ISANT4130	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
15.	I. Абатмент временный IS типа SCRP, варианты исполнения: ISAST460, ISAST480, ISAST4130	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
16.	I. Абатмент выжигаемый IS CCM UCLA без шестигранника: ISUCN400	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
17.	I. Абатмент выжигаемый IS CCM UCLA с шестигранником: ISUCH400	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
18.	I. Абатмент выжигаемый IS CCM UCLA типа SCRP: ISUCS400	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
19.	I. Абатмент пластиковый UCLA без шестигранника, варианты исполнения: ISUPN400, ISUPN500	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
20.	I. Абатмент пластиковый UCLA с шестигранником, варианты исполнения: ISUPH400, ISUPH500	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
21.	I. Абатмент фрезеруемый с шестигранником, варианты исполнения: ISSH428, ISSH448, ISSH528, ISSH548, ISSH628, ISSH648, ISSH728, ISSH748	1 шт./уп.

	II. Инструкция по применению.	
22.	I. Абатмент цементируемый без шестигранника, варианты исполнения: ISAN4140, ISAN4240, ISAN4340, ISAN4440, ISAN4540, ISAN415, ISAN425, ISAN435, ISAN445, ISAN455, ISAN417, ISAN427, ISAN437, ISAN447, ISAN457, ISAN5140, ISAN5240, ISAN5340, ISAN5440, ISAN5540, ISAN515, ISAN525, ISAN535, ISAN545, ISAN555, ISAN517, ISAN527, ISAN537, ISAN547, ISAN557, ISAN6140, ISAN6240, ISAN6340, ISAN6440, ISAN6540, ISAN615, ISAN625, ISAN635, ISAN645, ISAN655, ISAN617, ISAN627, ISAN637, ISAN647, ISAN657, ISAN7140, ISAN7240, ISAN7340, ISAN7440, ISAN7540, ISAN715, ISAN725, ISAN735, ISAN745, ISAN755 II. Инструкция по применению.	1 шт./уп.
23.	I. Абатмент цементируемый с шестигранником, варианты исполнения: ISAH4140, ISAH4240, ISAH4340, ISAH4440, ISAH4540, ISAH415, ISAH425, ISAH435, ISAH445, ISAH455, ISAH417, ISAH427, ISAH437, ISAH447, ISAH457, ISAH5140, ISAH5240, ISAH5340, ISAH5440, ISAH5540, ISAH515, ISAH525, ISAH535, ISAH545, ISAH555, ISAH517, ISAH527, ISAH537, ISAH547, ISAH557, ISAH6140, ISAH6240, ISAH6340, ISAH6440, ISAH6540, ISAH615, ISAH625, ISAH635, ISAH645, ISAH655, ISAH617, ISAH627, ISAH637, ISAH647, ISAH657, ISAH7140, ISAH7240, ISAH7340, ISAH7440, ISAH7540, ISAH715, ISAH725, ISAH735, ISAH745, ISAH755 II. Инструкция по применению.	1 шт./уп.
24.	I. Абатмент цементируемый типа SCRP, варианты исполнения: ISAS4140, ISAS4240, ISAS4340, ISAS4440, ISAS4540, ISAS415, ISAS425, ISAS435, ISAS445, ISAS455, ISAS417, ISAS427, ISAS437, ISAS447, ISAS457, ISAS5140, ISAS5240, ISAS5340, ISAS5440, ISAS5540, ISAS515, ISAS525, ISAS535, ISAS545, ISAS555, ISAS517, ISAS527, ISAS537, ISAS547, ISAS557, ISAS6140, ISAS6240, ISAS6340, ISAS6440, ISAS6540, ISAS615, ISAS625, ISAS635, ISAS645, ISAS655, ISAS617, ISAS627, ISAS637, ISAS647, ISAS657, ISAS7140, ISAS7240, ISAS7340, ISAS7440, ISAS7540, ISAS715, ISAS725, ISAS735, ISAS745, ISAS755 II. Инструкция по применению.	1 шт./уп.
25.	I. Аналог имплантата лабораторный, варианты исполнения: ISLA400, ISLA500, ISLA440, ISLA455, ISLA470, ISLA540, ISLA555, ISLA570, ISLA640, ISLA655, ISLA670, ISLA740,	1 шт./уп.



	ISLA755, ISLA770, ISLA5000	
	II. Инструкция по применению.	
26.	I. Аналог лабораторный Multi Unit: MUALA48	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
27.	I. Аналог лабораторный навигационный, варианты исполнения: SGISLA400, SGISLA500	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
28.	I. Аналог лабораторный шаровидного абатмента: BALA350	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
29.	I. Блок титановый IS DM Ti Block с шестигранником, варианты исполнения: ISBKH10DMD, ISBKH14DMD	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
30.	I. Блок титановый IS DM Ti Block без шестигранника: ISBKN10DMD	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
31.	I. Блок титановый IS OS Ti Block с шестигранником, варианты исполнения: ISBKH10OSD, ISBKH14OSD, ISBKH10OSMD	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
32.	I. Блок титановый IS OS Ti Block без шестигранника, варианты исполнения: ISBKN10OSD, ISBKN10OSMD	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
33.	I. Блок титановый IS Ti Block с шестигранником, варианты исполнения: ISBKH10NBD, ISBKH14NBD	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
34.	I. Блок титановый IS Ti Block без шестигранника: ISBKN10NBD	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
35.	I. Винт абатмента, варианты исполнения: ISCS20, ISCS20OS, ISCS20COS, ISCS20DM, ISAMUAS20, ISCS16OSM	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
36.	I. Винт для Multi Unit Abutment Cylinder: MUAS14	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
37.	I. Винт для оттискного колпачка, варианты исполнения: ISPCIS20, ISPCIS16, EBPCIS16, EBPCIS20, EBPCIS25	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
38.	I. Винт для трансфера Multi Unit Abutment: MUAIPS48	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
39.	I. Винт для трансфера слепочного, варианты исполнения: ISPIS20, ISPISL20, ISTIS20H, ISTISL20H	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	

40.	I. Винт для устройства для извлечения имплантатов, варианты исполнения: FRS14, FRS16, FRS18, FRS172, FRS20, FRS25 II. Инструкция по применению.	1 шт./уп.
41.	I. Втулка хирургическая направляющая для шаблона, варианты исполнения: SGS55N, SGS70RW, CSGS70RW II. Инструкция по применению.	1 шт./уп.
42.	I. Держатель абатмента IS Multi Unit углового: AMUAH35 II. Инструкция по применению.	1 шт./уп.
43.	I. Колпачок для оттиска, варианты исполнения: PCISC01, PCILC01 II. Инструкция по применению.	1 шт./уп.
44.	I. Колпачок для оттиска, варианты исполнения PCISC0110S, PCILC0110S II. Инструкция по применению.	10 шт./уп.
45.	I. Колпачок пластиковый для слепочного трансфера, варианты исполнения: ISPIC411, ISPIC511, ISPIC611, ISPIC711 II. Инструкция по применению.	1 шт./уп.
46.	I. Колпачок пластиковый, варианты исполнения: ISPCN410, ISPCN510, ISPCN610, ISPCN710, ISPCN410, ISPCN510, ISPCN610, ISPCN710 II. Инструкция по применению.	1 шт./уп.
47.	I. Кольцо клиническое для шаровидного абатмента: BAORING II. Инструкция по применению.	3 шт./уп.
48.	I. Матрица для фиксации абатмента: BAH40 II. Инструкция по применению.	1 шт./уп.
49.	I. Платформа IS OS Mini Link с шестигранником: ISLKH4035OSM II. Инструкция по применению.	1 шт./уп.
50.	I. Трансфер оттискный, варианты исполнения: ISPCIB3503C, ISPCIB3505C, ISPCIB3508C, ISPCIB3510C, ISPCIB4003C, ISPCIB4005C, ISPCIB4008C, ISPCIB4010C, ISPCIB403C, ISPCIB405C, ISPCIB408C, ISPCIB410C, ISOSPCI403C, ISOSPCI405C, ISSNPCI3505C, ISSNPCI3507C, ISPCIB502C, ISPCIB503C, ISPCIB504C, ISPCIB505C, ISPCIB506C, ISPCIB602C, ISPCIB603C, ISPCIB604C, ISPCIB605C, ISPCIB606C, ISPCIB702C, ISPCIB703C, ISPCIB704C, ISPCIB705C, ISPCIB706C, ISOSPCI503C, ISOSPCI505C, EBPCIBN403C, EBPCIBN405C, EBPCIBR403C, EBPCIBR405C, EBPCIBR503C, EBPCIBR505C, ITPCIB503C, ITPCIB703C II. Инструкция по применению.	1 шт./уп.
51.	I. Трансфер слепочный с шестигранником, варианты	1 шт./уп.

	исполнения: ISITH411O, ISITH511O, ISITH611O, ISITH411, ISITH511, ISITH611, ISITHL411, ISITHL511, ISITHL611	
	II. Инструкция по применению.	
52.	I. Трансфер слепочный без шестигранника, варианты исполнения: ISITN411, ISITN511, ISITN611, ISITNL411, ISITNL511, ISITNL611	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
53.	I. Трансфер слепочный для закрытой ложки Multi Unit Abutment: MUAIT48	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
54.	I. Трансфер слепочный для открытой ложки Multi Unit Abutment: MUAIP48	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
55.	I. Трансфер слепочный, варианты исполнения: ISIPH411O, ISIPH511O, ISIPH611O, ISIPH400, ISIPH450, ISIPH411, ISIPH511, ISIPH611, ISIPN400, ISIPN450, ISIPN411, ISIPN511, ISIPN611, ISIPS400, ISIPS450, ISIPS411, ISIPS511, ISIPS611, ISIPHL400, ISIPHL450, ISIPHL411, ISIPHL511, ISIPHL611, ISIPNL400, ISIPNL450, ISIPNL411, ISIPNL511, ISIPNL611, ISIPSL400, ISIPSL450, ISIPSL411, ISIPSL511, ISIPSL611	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
56.	I. Фиксатор шаровидного абатмента: BAR20	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
57.	I. Цилиндр IS титановый без шестигранника, варианты исполнения: ISTCAN4509, ISTCAN5509	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
58.	I. Цилиндр IS титановый с шестигранником, варианты исполнения: ISTCAN4509, ISTCAN5509	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
59.	I. Цилиндр Multi Unit CCM: MUACCN48	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	
60.	I. Цилиндр Multi Unit временный: MUATPCN48	1 шт./уп.
	II. Инструкция по применению.	

11. Расшифровка символов, применяемых в маркировке потребительской и транспортной упаковки

Таблица 90. Символы и расшифровка

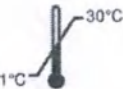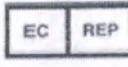Символ	Расшифровка	Символ	Расшифровка
	Производитель		Номер партии
	Номер по каталогу (артикул)		«Использовать до...»
	Дата изготовления		«Осторожно!»
	Запрет на повторное применение		Не использовать при повреждении упаковки
	Предел температуры		Надпись «только по предписанию врача» (на англ. языке)
	Не стерильно		Обратитесь к инструкции по применению
	Не подвергать воздействию солнечных лучей		Уполномоченный представитель в ЕС

12. Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия

Изделия в техническом обслуживании и ремонте не нуждаются.

13. Стерилизация, очистка и дезинфекция

Данное изделие является нестерильным медицинским изделием. Его стерилизация должна проводиться при температуре 134 °С, продолжительность стерилизации: 4 мин., продолжительность сушки: 30 мин.

14. Условия транспортировки, хранения и эксплуатации

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Условия транспортирования:

- температура – от 1 до +30 °С;
- относительная влажность воздуха – особых требований нет
- атмосферное давление: особых требований нет

Условия хранения: в сухом месте вдали от прямых солнечных лучей:

- температура – от 1 до +30°С
- относительная влажность воздуха – особых требований нет
- атмосферное давление: особых требований нет

Условия эксплуатации:

- Температура эксплуатации от +32 °С до +42 °С

Условия в помещениях при эксплуатации медицинского изделия:

- Температура от +18 °С до +30 °С

15. Срок годности

Срок годности компонентов для протезирования для имплантатов дентальных Neobiotech – не ограничен.

16. Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия

Медицинские изделия «Компоненты для протезирования для имплантатов дентальных Neobiotech» после использования их по назначению относятся к эпидемиологически опасным отходам (изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, а также изделия, контактирующие с пациентами с инфекционными болезнями).

В данном случае медицинская организация осуществляет только сбор и временное хранение вышеуказанных отходов. Сбор осуществляют в пакеты или в контейнеры однократного применения с цветовой маркировкой, принятой для опасных медицинских отходов в помещении или в местах для временного хранения медицинских отходов до последующего транспортирования к месту уничтожения или утилизации.

Транспортированием медицинских отходов (использованных компонентов) из медицинских учреждений, их утилизацией занимаются специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными в эпидемиологическом отношении медицинскими отходами.

Потребительская упаковка, бракованные изделия и неиспользованные изделия относятся к эпидемиологически безопасным отходам (неопасным отходам, не имеющим контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными), приближенным по составу к твердым бытовым отходам (ТБО). Однако рекомендуется утилизировать их отдельно как промышленный отход через специализированные организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности.

Сбор неопасных отходов осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты (за исключением пакетов цвета, принятого для опасных отходов). Одноразовые пакеты располагаются внутри многоразовых контейнеров. Емкости для сбора отходов должны быть промаркированы и установлены на специальной площадке (в помещении). Многоразовая тара после опорожнения подлежит мытью и дезинфекции. Порядок мытья и дезинфекции многоразовой тары определяется в соответствии со схемой обращения отходов в каждой конкретной организации.

Транспортирование и утилизация осуществляются с учетом требований, принятых для данной территории, в соответствии с санитарным законодательством той или иной страны к содержанию территорий населенных мест и обращению с отходами производства и потребления.

[Форма № 43]

[Текст на английском и корейском языках идентичен]

Регистрационный номер: 2023 – 722

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Юн Хан Чжу (Yoon Han Ju),
поверенный Хео Юнг Ку, генерального директора
«Необайотек Ко., Лтд.»,
лично явившийся ко мне, признал указанную
подпись доверителя на прилагаемой
Инструкции по применению на медицинское изделие

Настоящим засвидетельствовано 08 июня 2023 года в указанной нотариальной конторе.

Наименование нотариальной конторы:

«ДИ.ЭЛ.ЭС. ПАРТНЕРС»

Относится к Прокуратуре южного округа Сеула

Адрес конторы:

И&Си Венчер Дрим Тауэр, 3 ком., № 509, 38-21,
Диджитал-ро, 31-гил, Куро-гу, Сеул, Корея

/подпись/

Подпись нотариуса

Чон Кён Тэ (Jeong Kyeong Tae)

[Печать: Нотариальная контора «ДИ.ЭЛ.ЭС. ПАРТНЕРС», нотариус Чон Кён Тэ]

[Печать: Нотариальная контора «ДИ.ЭЛ.ЭС. ПАРТНЕРС», нотариус Чон Кён Тэ]

Настоящая нотариальная контора уполномочена Министром юстиции Республики Корея
предоставлять нотариальные услуги с 7 февраля 2020 года в соответствии с законом
№ 15150.

210 мм x 297 мм
(Бланк с защитой) (1 категория) 70 г/м²

[*Штамп*: Настоящий документ содержит 53 страницы
Хео Юнг Ку /*подпись*/ (подпись)
Генеральный директор
«Необайотек Ко., Лтд.»]

[*Печать компании «Необайотек Ко., Лтд.»*]

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Двадцатого июня две тысячи двадцать третьего года

Я, Моисеева Лилия Владимировна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Князевой Виталины Васильевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 50/995-н/77-2023- 17 - 1646

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

ПОДПИСЬ

Гербовая печать
нотариуса г. Москвы
Моисеевой Л.В.

Л.В. Моисеева

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 106 лист(-а,-ов).

Л.В. Моисеева

ПОДПИСЬ

Гербовая печать
нотариуса г. Москвы
Моисеевой Л.В.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцатого июня две тысячи двадцать третьего года

Я, Моисеева Лилия Владимировна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 50/995-н/77-2023- 17 - 1647

Уплачено за совершение нотариального действия 10700 руб. 00 коп.

Л.В. Моисеева

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 106 лист(-а,-ов).

Л.В. Моисеева