


ФОТОГРАФИИ ИЗДЕЛИЙ




Стельки ортопедические – «Крейт», СК-103


(а так же: СК-104, СК-113, СК-133, СК-138, СК-139)

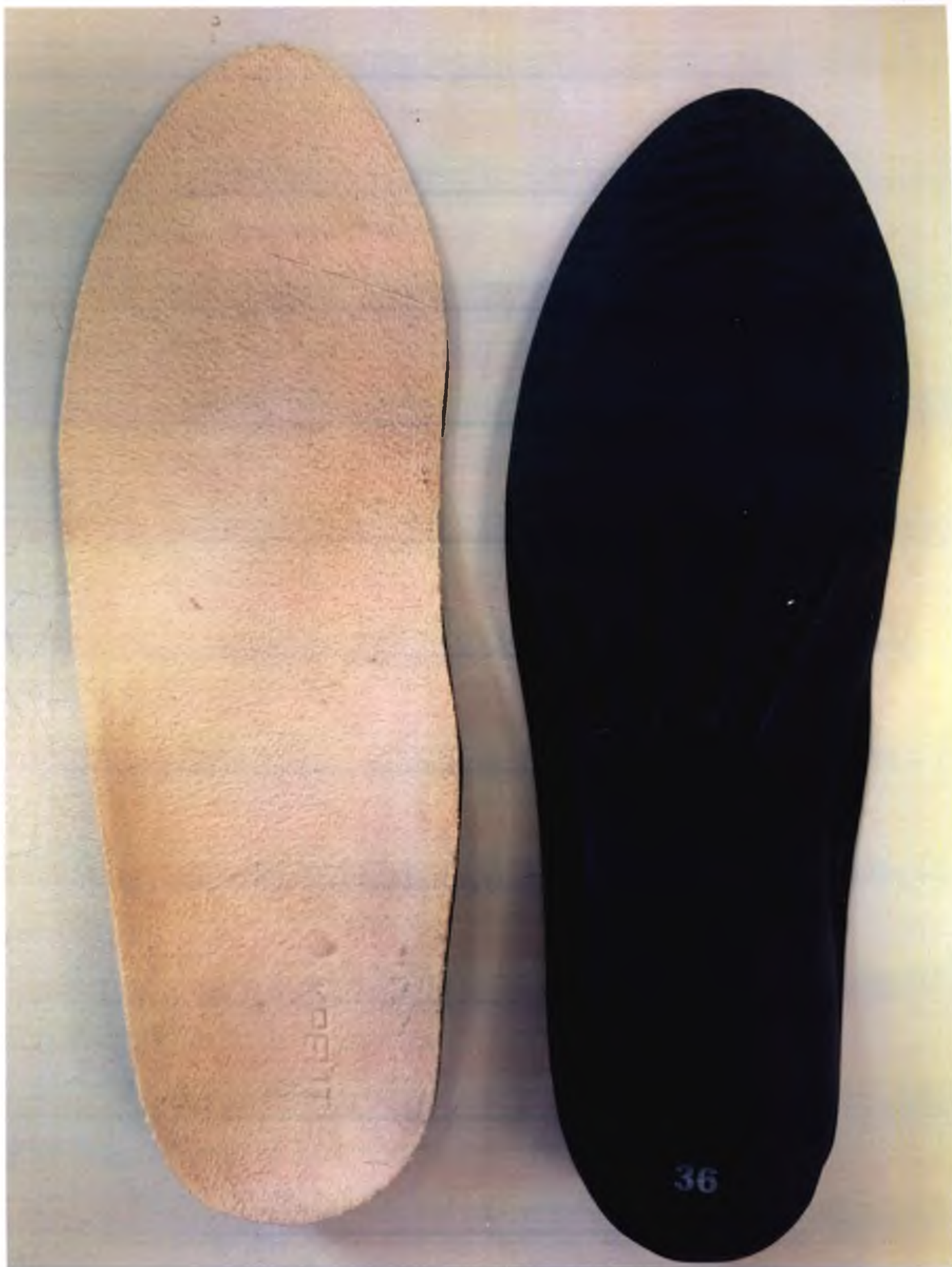


Стельки ортопедические – «Крейт», СК-110
(а так же: СК-119, СК-143)

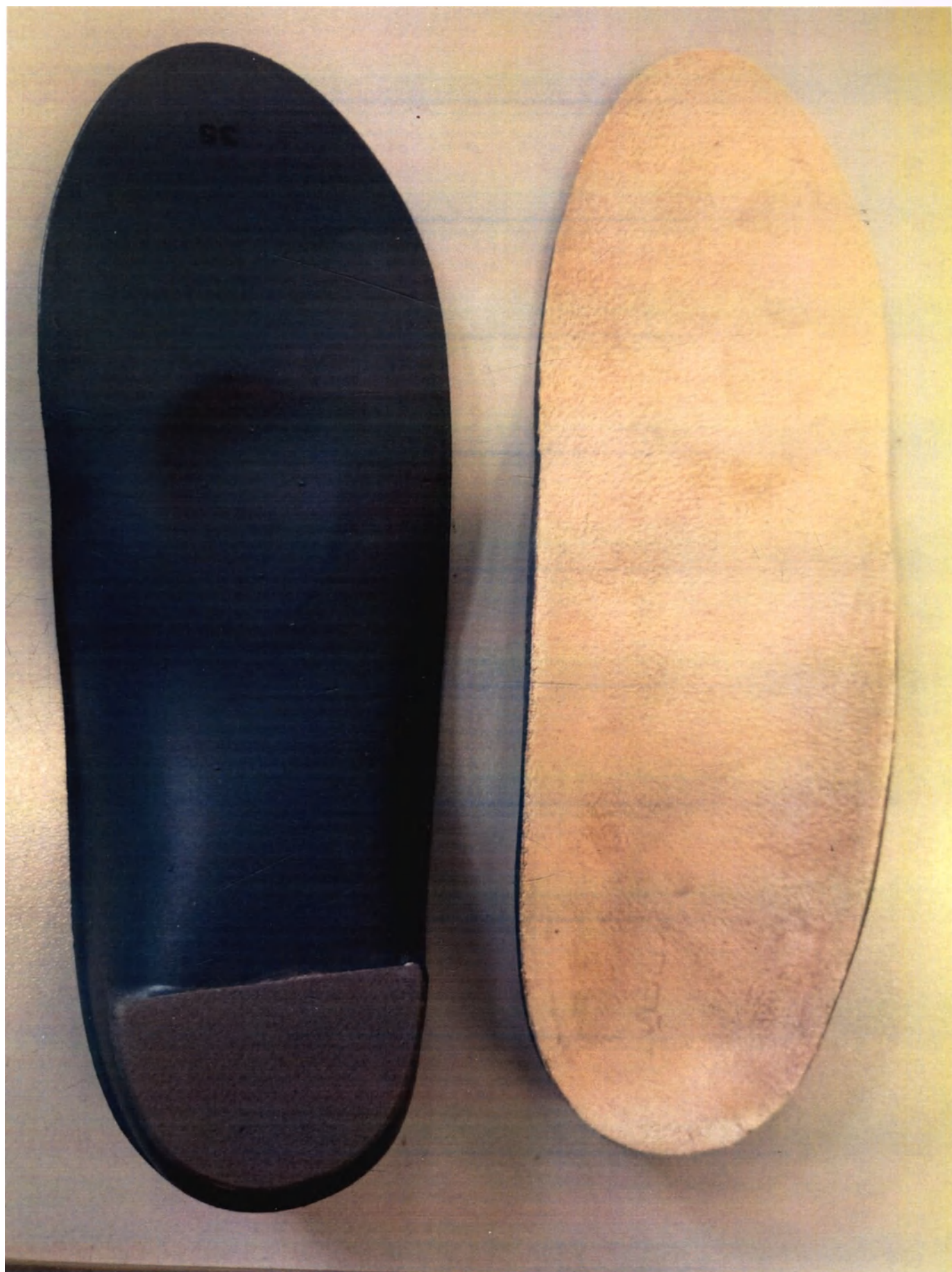


Стельки ортопедические – «Крейт», СК-117

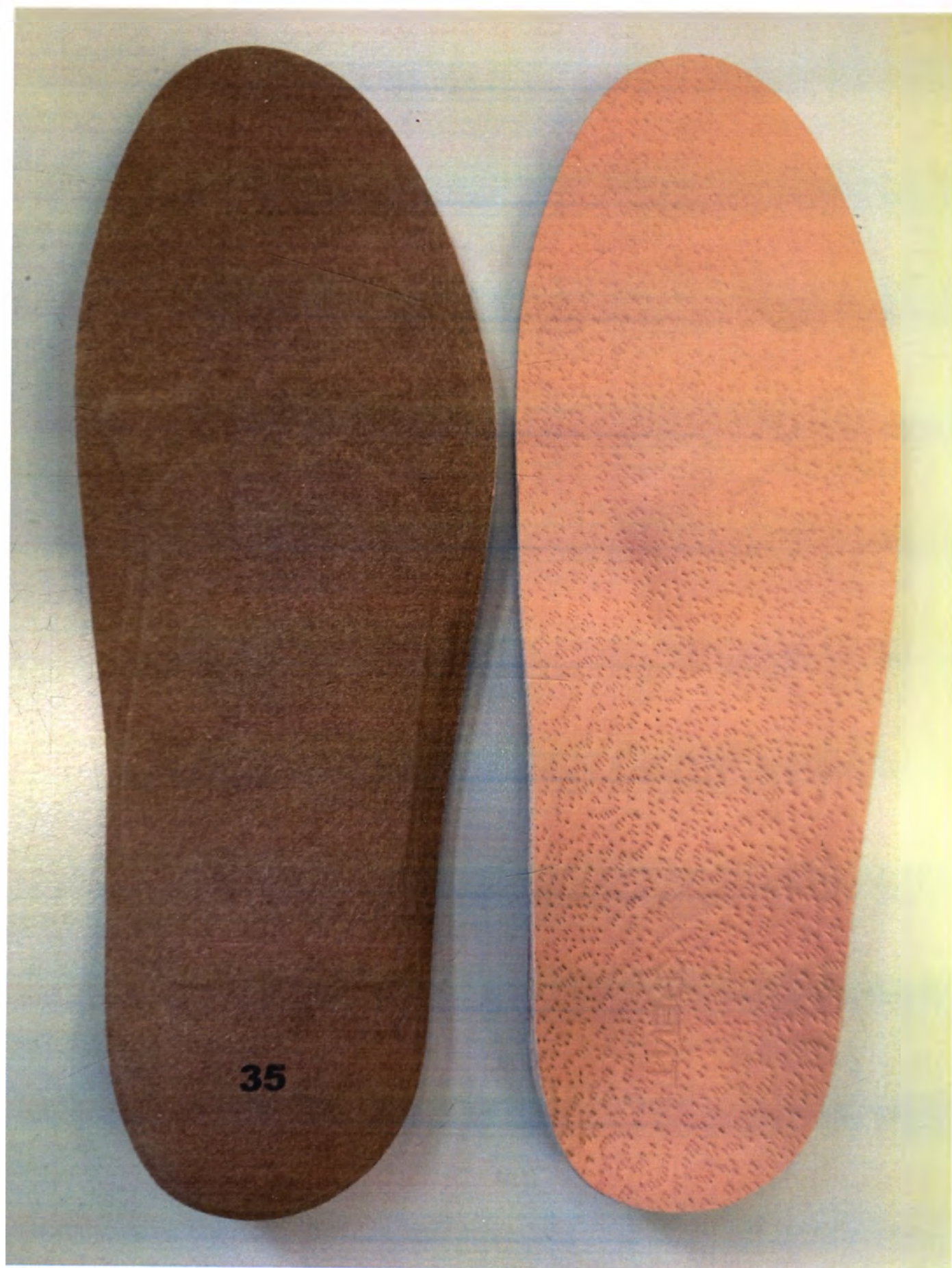

Стельки ортопедические – «Крейт», СК-137

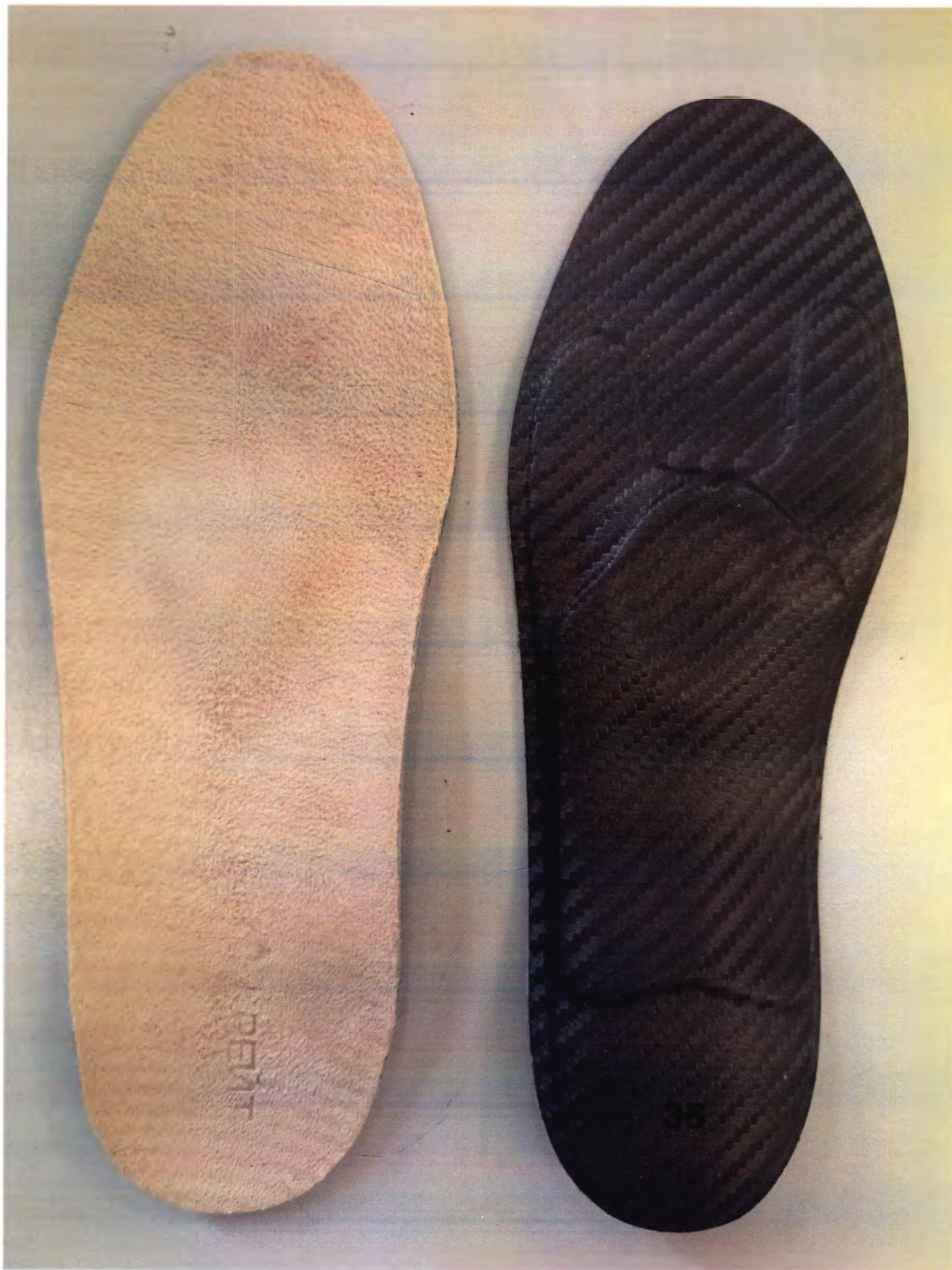


Стельки ортопедические – «Крейт», СК-145

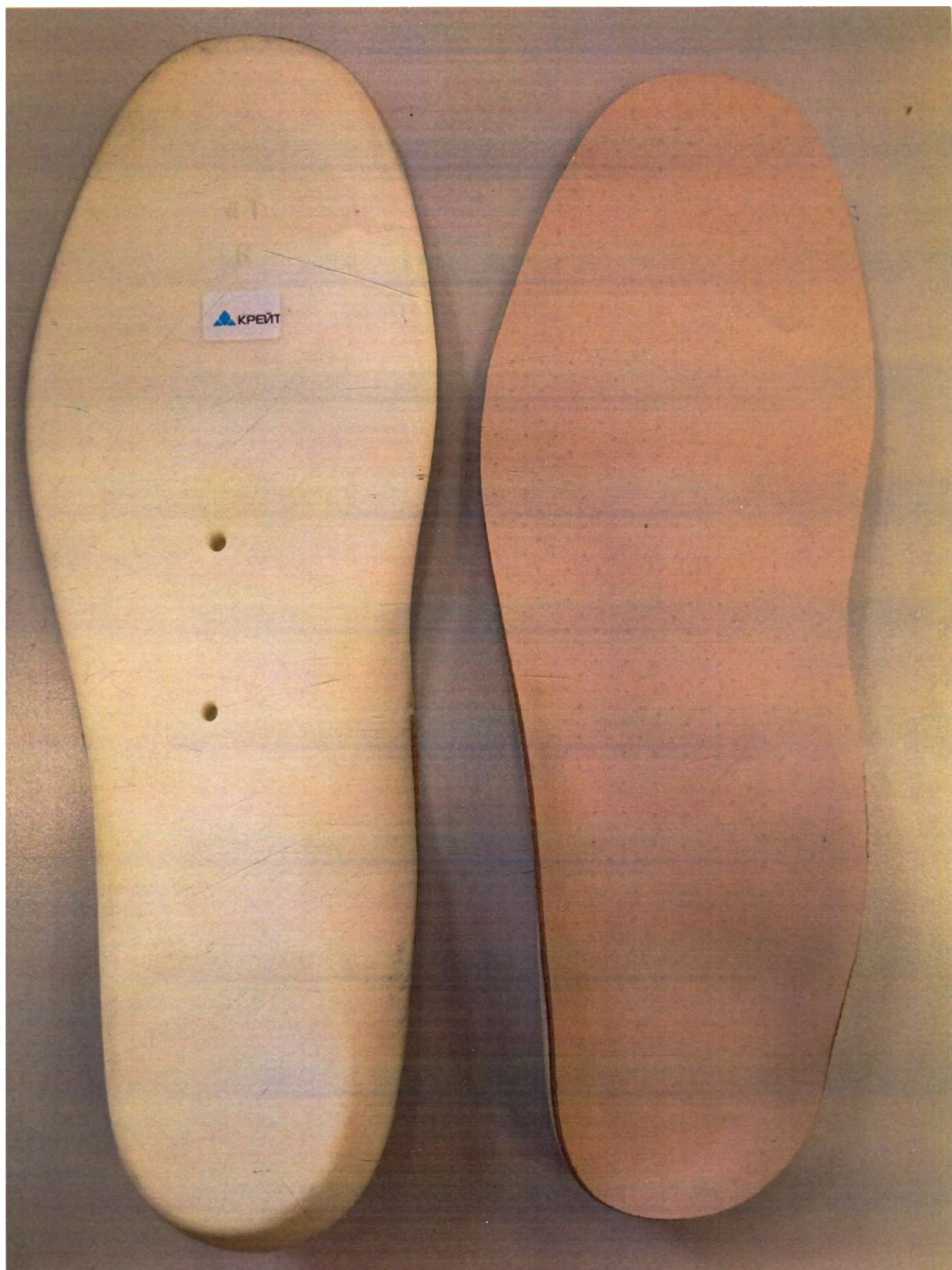


Стельки ортопедические – «Крейт», СКП-25

(а так же: СКП-23, СКП-24, СКП-26, СКП-27, СКП-35, СКП-36, СКП-40)

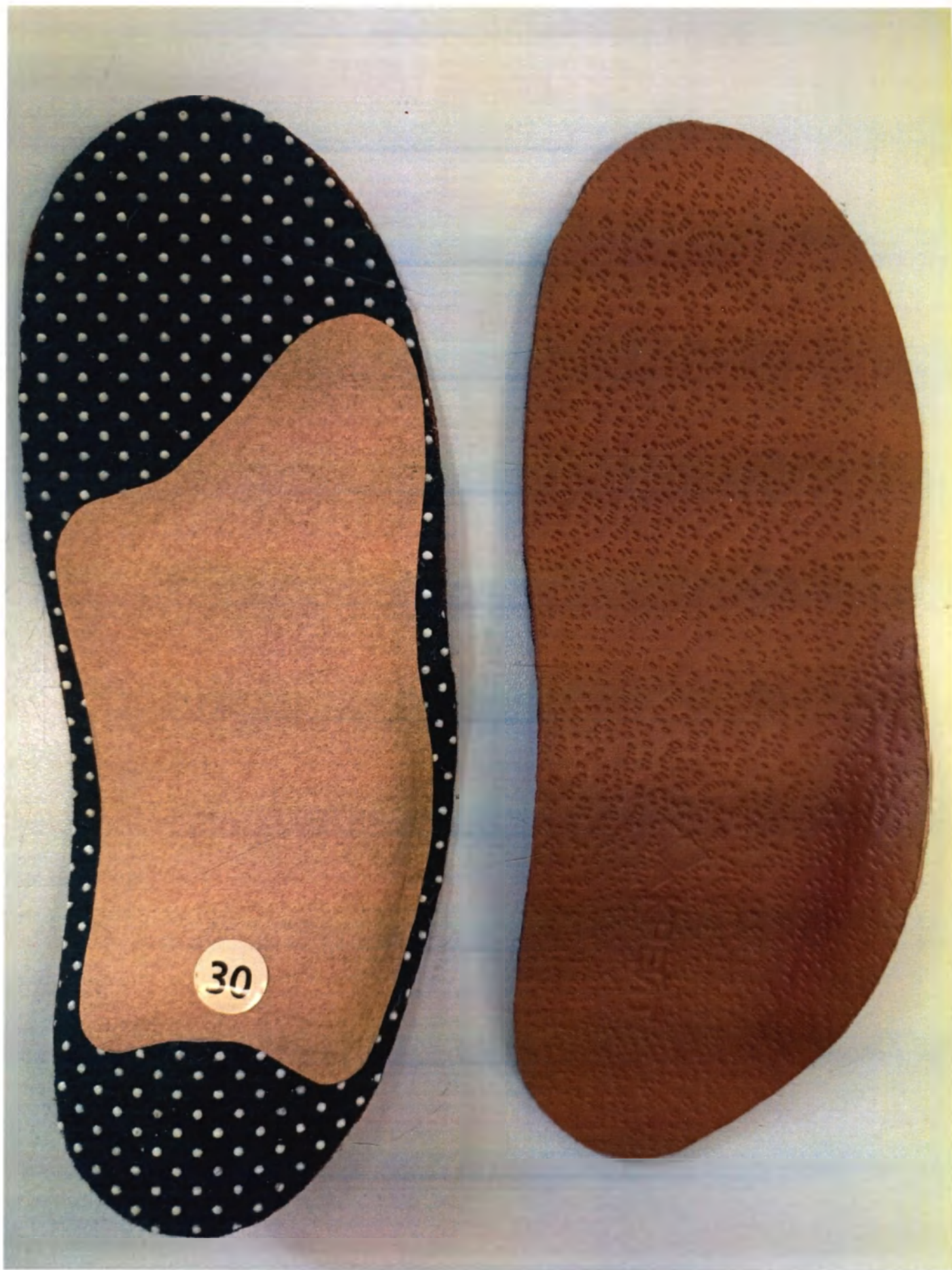


Стельки ортопедические детские – «Крейт», СК-214

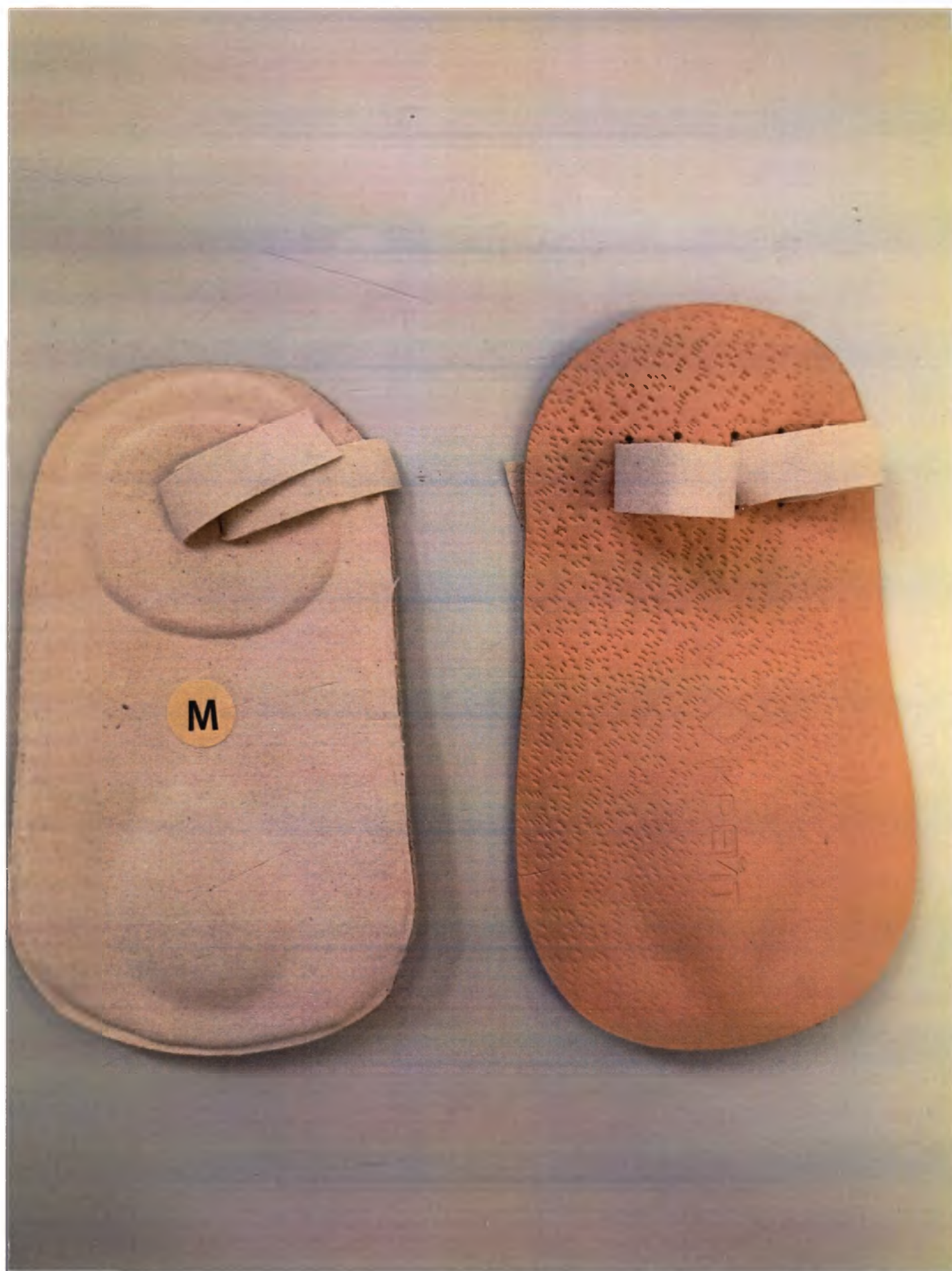


Вкладыши ортопедические под передний отдел стопы – «Крейт», СК-155-2П

(а так же: СК-155-1П, СК-156-1П, СК-156-2П)

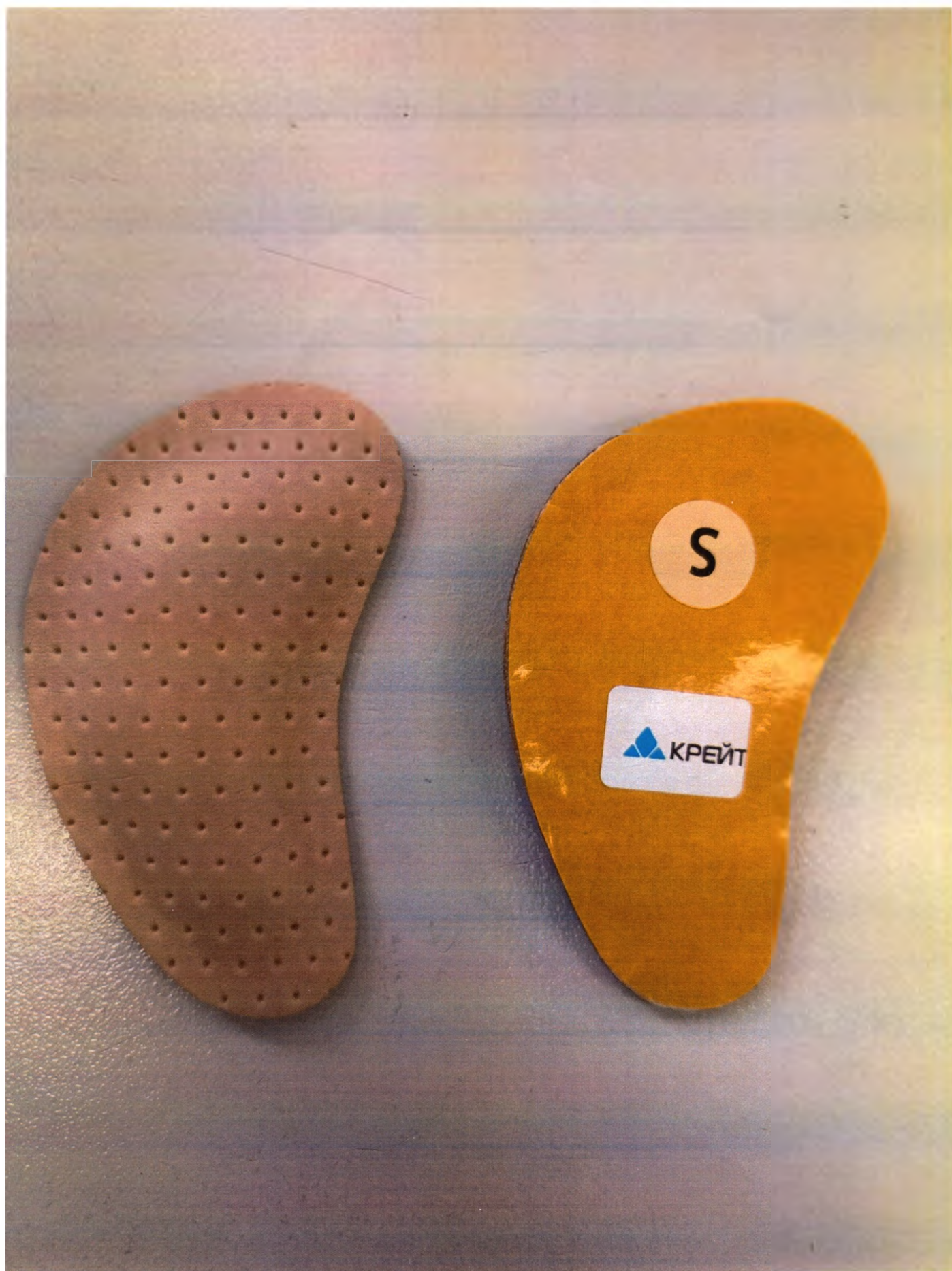


Вкладыши ортопедические под передний отдел стопы – «Крейт», СК-162

(а так же: СК-158, СК-164)

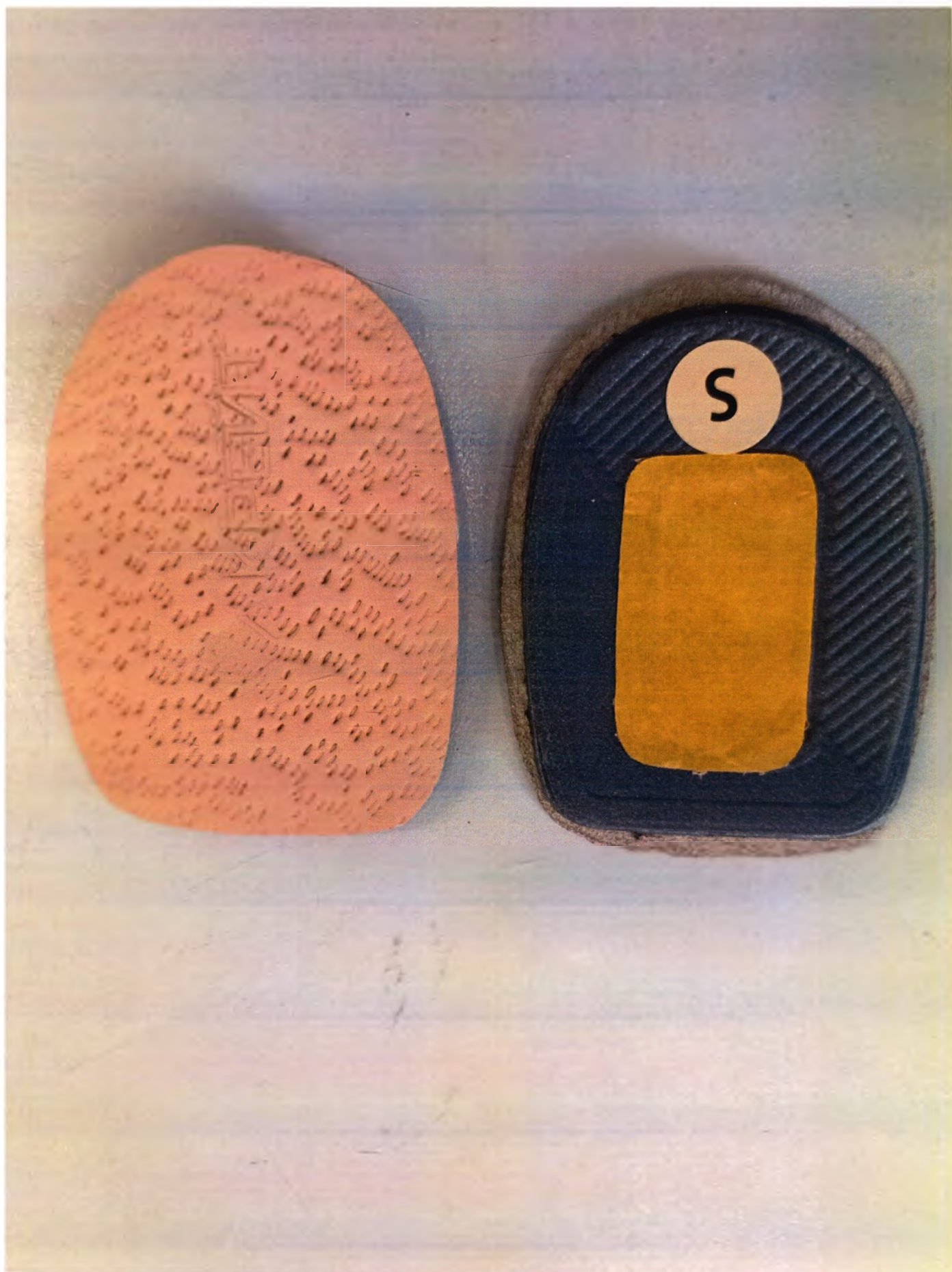

Подпяточники ортопедическе – «Крейт», СК-177

(а так же: СК-159, СК-178-6, СК-178-10, СК-180)

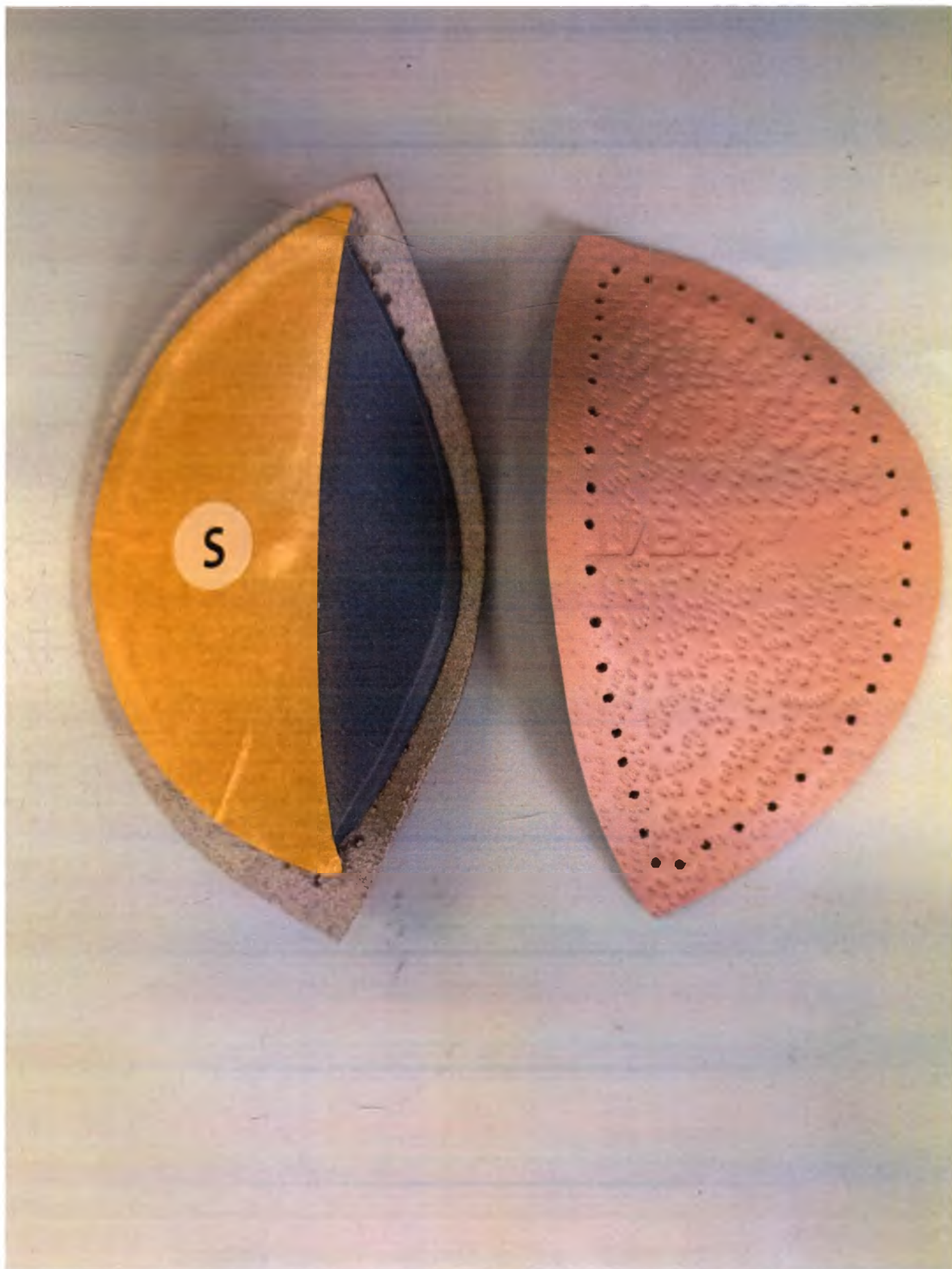

Вкладыши ортопедические под продольный свод стопы- «Крейт», СК-168



Вкладыши ортопедические в задник обуви – «Крейт», СК-157

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 13 лист(ов)

Руководитель организации

Крейт



МАКЕТ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ

При получении груза проверить целостность упаковки



Получатель:

Адрес:

Телефон:



Номер заказа:

Вес брутто:

Отправитель: ООО «Крейт»

Адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 11, корп. 4, литер А, пом. 24Н

Телефон 8 (812) 748-25-00

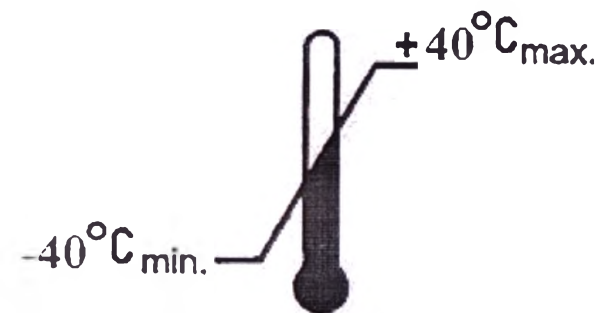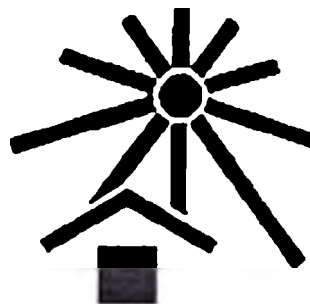

ортопедические –
«Крейт», СК-110

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Стельки ортопедические - «Крейт», СК-110 предназначены для поглощения ударной нагрузки на стопы и ношения в повседневной обуви с каблук до 5 см.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, комплексное лечение hallux valgus, боли в области пятки, заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей, варикозная болезнь, избыточный вес, беременность, длительное пребывание на ногах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Необходимость индивидуального ортезирования стопы, открытые и кровоточащие раны, аллергическая реакция на материалы.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Степники должны эксплуатироваться в стандартной обуви на низком или среднем каблуке, соответствующего размера. При использовании ортопедических стелек стопа принимает внутри обуви правильное (корригированное) положение, поэтому на новые стельки необходимо привыкнуть. Период привыкания составляет в среднем от 1 до 7 дней. Приобретая новую обувь, примерять ее вместе со стельками. Не носить обувь со стельками на голую ногу.

Размер	Длина стопы, мм	Масса готового изделия, г ± 20 %
35	225	58,3
36	230	60,2
37	235	64,9
38	245	68,3
39	250	72,2
40	255	74,5
41	265	80,4
42	270	81,2
43	275	86,2
44	285	92,5
45	290	94,8
46	295	96,3
47	305	98,1

Номер партии

Отметка ОТК

Применять по назначению врача. Изделие многоразового использования. Нестерильно. Изделие изготовлено на заказ, т.е. конструкция учитывает среднестатистические характеристики и параметры стоп однородной по диагнозу группы людей и изготавливается на обозначенного потребителя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице размеров. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила утилизации, обозначенные на упаковке. Не использовать для любых других целей. Не использовать для любых других целей.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

Должны проводиться гигиеническая обработка изделий мягкой тканью, увлажненной нейтральными моющими средствами. Стебли необходимо ежедневно просушивать при комнатной температуре. Стебли нельзя сушить на нагревательных поверхностях (в том числе на обогревательных радиаторах) и вблизи их.

Состав: Ковка КРС - 35%, этиленвиниловый лацетат - 35%, полипропилен - 20%, полиуретан - 5%, полиэтиленпропилен - 5%.

Комплект поставки включает:

- изделие - 1 пара;
- потребительская упаковка с нанесенной инструкцией по применению - 1 штука.

CK-110

ортопедические –
«Крейт», СК-110

[illegible]

Исследования
А.П.С. и М.П.С. по теме «Влияние на организм человека электромагнитных полей (ЭМП) от ЛЭП» финансируются из бюджета Республики Беларусь. Авторы благодарят за помощь в проведении исследований и публикации в журнале «Экология человека» М.П.С. и А.П.С. за предоставленные материалы. Авторы благодарят за помощь в проведении исследований и публикации в журнале «Экология человека» М.П.С. и А.П.С. за предоставленные материалы.



ортопедические –
«Крейт», СК-103

CEMA FACTORCUB-400 31 FME H100



Стельки ортопедические – «Крейт», СК-103 предназначены для поглощения ударной нагрузки на стопы и ношения в повседневной обуви с каблук до 5 см.

Профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей, варикозная болезнь, избыточный вес, беременность, длительное пребывание на ногах

Необходимость индивидуального ортезирования стопы, открытые и кровоточащие раны, аллергическая реакция на материалы.

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия

Стельки должны эксплуатироваться в стандартной обуви на низком или среднем каблуке, соответствующего размера. При использовании ортопедических стелек стола принимаем внутри обуви правильное (корригируемое) положение, поэтому к новым стелькам необходимо привыкнуть. Период привыкания составляет в среднем от 1 до 7 дней. Приобретая новую обувь, примерять ее вместе со стельками. Не носить обувь со стельками на голую ногу.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Применять, соблюдая условия, указанные в таблице расчетов. Не допускается применять по истечении срока хранения. Несоблюдение условий хранения, срок хранения и правила утилизации обозначены на упаковке. Не использовать для открытого пламени.

Допускается применять также искусственные нейтральные средства. Степень просушки не выше температуры. Стебли не сушить на нагревательных приборах (в том числе на обогревательных радиаторах) и вблизи источников тепла.

Состав: Этиленвинилацетат - 80%,
микролайнер - 20%

Комплект поставки включает:
- изделие - 1 штука
- потребительская упаковка
с нанесенной инс. группацией
по применению - 1 штука

Применять по назначению врача. Издание многократового использования. Стерильно. Издание изготовлено на подбор, т.е. конструкция учитывает среднестатистические характеристики и параметры стоп однородной по диагнозу группы людей и изготавливается на обезличенного потребителя.



СТЕЛКИ
ортопедические – «Крейт», СК-103

CK-103

СТЕЛЬКИ



Противопожарные средства, такие, как огнетушители, пожарные щиты, пожарные лестницы, должны быть в легкодоступных местах. Пожарные щиты должны быть оборудованы огнетушителем, лопатой, топором, ведром, совком, ломом, а также аптечкой первой помощи. Пожарные щиты должны быть размещены в местах, доступных для эвакуации. Пожарные щиты должны быть размещены в местах, доступных для эвакуации. Пожарные щиты должны быть размещены в местах, доступных для эвакуации.

 ООО ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

 ООО ЦИПМИ **INFO@CIRMI.RU** **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

ООО ЦРПИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СТЕЛКИ
ортопедические -
«Крейт», СКП-27

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СРЕДНА РАСПОЛОЖИТЕЛНОСТ НА РЕЗЕРВНОС



НАЗНАЧЕНИЕ:

Стежки ортопедические - «Крейт», СКП-27 предназначены для поглощения ударной нагрузки на стопы и кошения в повседневной обуви с каблуком до 5 см.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей, варикозная болезнь, избыточный вес, беременность, длительное пребывание на ногах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Необходимость индивидуального ортезирования стопы, открытые и кровоточащие раны, аллергическая реакция на материалы.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Степками должны эксплуатироваться в стандартной обуви на низком или среднем каблуке, соответствующего размера. При использовании ортопедических стелек стопа принимает внутри обуви правильное (корригированное) положение, поэтому с новыми стельками необходимо привыкнуть. Период привыкания составляет в среднем от 1 до 7 дней. Приобретая новую обувь, примерьте её вместе со стельками. Не носите обувь со стельками на голую ногу.

Размер	Длина стопы, мм	Масса готового изделия, г ±20%
35	225	110,9
36	230	115,1
37	235	122,6
38	245	135,6
39	250	140,7
40	255	147,8
41	265	148,5
42	270	152,3
43	275	158,9
44	285	162,1
45	290	165,5
46	295	170,6
47	305	173,2

ИЗЕМЪ БЕЗОПАСНОСТИ)

принимать, соблюдать размеры, указанные в таблицах размеров, предоставляемых гражданам на основании срока хранения. Подписавший соблюдать условия хранения, срок хранения и условия утилизации, обязательные для исполнения. По истечении срока хранения документов

УЛОД ЗА ИЗДЕЛИТЕМ:

Допускается проводить химическую обработку изделий из сталей групп А, деформированных в процессе прокатки. Сталь маркируется в соответствии с требованиями ГОСТ 1050-76. Допускается проводить химическую обработку изделий из сталей групп А, деформированных в процессе прокатки. Сталь маркируется в соответствии с требованиями ГОСТ 1050-76.

Gasas: monóxido de carbono - 90%,
óxido de nitrógeno - 10%.

Комплект поставки включает:
- аппарат - 1 паря,
- потребительская упаковка
с напечатанной инструкцией
по применению - 1 штука.

Модель адаптации
Оценки ОТК

Применять по назначению врача. Взаимодействие с другими препаратами. Противопоказано на подбор, т.е. конструкция учитывает индивидуальные характеристики и параметры тела однородной по диагнозу группы людей и изготавливается на индивидуальное соотношение.



СКП-27

СТЕЛЬКИ

ортопедические –
«Крейт», СКП-27



Регистрационное удостоверение
Стекла ортопедические и корригирующие приспособления для стопы «ИРЕЙТ». Стекла ортопедические «ИРЕЙТ», СИП-27. Транспортировка и защитная транспортировка: средства в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150, но для температуры от -40° до +40° ИС в упаковке должны храниться на складах в закрытых сухих помещениях при температуре от 15°С до 25°С, а относительная влажность воздуха от 50% до 80% и не более, чем на 1 м от обогревательных приборов. Исполнитель обязан соблюдать в любой форме меры предосторожности для сбора отходов класса А и утилизировать канisters биологические в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3.684.

Дата изготовления: 20 г.г.

СРЕДНАТА ГОДИШНА СЪБИТЕЛНОСТ



Стельки ортопедические - «Крейт», СКП-26 предназначены для поглощения ударной нагрузки на стопы и ношения в повседневной обуви с каблуком до 5 см.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей, варикозная болезнь, избыточный вес, беременность, длительное пребывание на ногах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Необходимость индивидуального ортезирования стопы, открытые и кровоточащие раны, аллергическая реакция на материалы.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Степкам должны эксплуатироваться в стандартной обуви на низком или среднем каблуке, соответствующего размера. При использовании ортопедических стелек стопа принимает внутри обуви правильное (корригированное) положение, поэтому к новым стелькам необходимо привыкнуть. Период привыкания составляет в среднем от 1 до 7 дней. Приобретая новую обувь, примерять ее вместе со стельками. Не носить обувь со стельками на голую ногу.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Примечание. Ссылочные размеры, указанные в таблице размеров. Не допускается применять на валочном трелевателе комплект. Небольшие отклонения уровня комплект, при работе в густом лесу, обусловлены не на упаковке. Не использовать абразивные материалы.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

Доступается проводить незначительную обработку изделий мыльной тряпкой, удаляющей загрязнения, а также специальными средствами. Стены необходимо ежедневно просушивать при комнатной температуре. Стелам нельзя сушить на нагревательных поверхностях (в том числе обогревательных радиаторах) и вблизи отопительных труб.

Conc. Feas. monomer/catalyst = 500%,
conc. KPC = 10%.

Комплект поставки включает:

- изделие – 1 пара;
- потребительская упаковка с нанесённой инструкцией по применению – 1 штука.

Номер партии: _____
Отметка ОТК: _____

Применять по назначению врача. Изделие многоразового использования. Нестерильно. Изделие изготовлено на подборт, т.е. конструкция учитывает среднестатистические анатомические параметры строения тела по диагностической группе людей и изготавливается на основании индивидуального потребителя.



СКП-26

СТЕЛЬКИ

ортопедические –
«Крейт», СКП-26



Согласно результатам корреляционного анализа данные для темы «ОГЭ» (средняя корреляция между «уверен» и «ОГЭ» составила 0,39), «уверенность» и «уверенность в себе» коррелирует с «ОГЭ» в среднем по классу (средняя корреляция между «уверенность в себе» и «ОГЭ» составила 0,37). В то же время для темы «ОГЭ» (средняя корреляция между «уверенность в себе» и «ОГЭ» составила 0,37) и «уверенность в себе» коррелирует с «ОГЭ» в среднем по классу (средняя корреляция между «уверенность в себе» и «ОГЭ» составила 0,37). В то же время для темы «ОГЭ» (средняя корреляция между «уверенность в себе» и «ОГЭ» составила 0,37) и «уверенность в себе» коррелирует с «ОГЭ» в среднем по классу (средняя корреляция между «уверенность в себе» и «ОГЭ» составила 0,37).

 ООО ЦИПМИ **INFO@CIRMI.RU** **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

СТЕЛКИ ортопедические – «Крейт», СКП-24

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Схема расположения слоев стельки



НАЗНАЧЕНИЕ:

Стельки ортопедические – «Крейт», СКП-24 предназначены для защиты стоп от переохлаждения и профилактики комбинированного плоскостопия для зимней и демисезонной обуви с каблучком до 5 см.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей, варикозная болезнь, избыточный вес, беременность, длительное пребывание на ногах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Необходимость индивидуального ортезирования стопы, открытые и кровоточащие раны, аллергическая реакция на материалы.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Стельки должны эксплуатироваться в стандартной обуви на низком или среднем каблуке, соответствующего размера. При использовании ортопедических стелек стопа принимает внутри обуви правильное (корригированное) положение, поэтому к новым стелькам необходимо привыкнуть. Период привыкания составляет в среднем от 1 до 7 дней. Приобретая новую обувь, примеряйте ее вместе со стельками. Не носите обувь со стельками на голую ногу.

Размер	Длина стопы, см	Масса в готовом изделии, г ± 20%
25	225	108,9
26	230	116,0
27	235	123,4
28	245	133,8
29	250	138,2
30	255	141,4
31	265	146,7
32	270	150,9
33	275	156,1
34	285	161,2
35	290	163,8
36	295	157,9
37	305	172,4

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице размеров. Не допускается применение по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на упаковке. Не использовать вблизи открытого пламени.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

Рекомендуется сушить чистые. Стельки необходимо периодически проветривать при комнатной температуре. Стельки нельзя сушить на нагревательных приборах, в том числе электрических радиаторах и вблизи источников тепла.

Состав: полиуретан – 80%, полиэфир – 15%, целлюлоза – 5%.

Комплект поставки изделия:

- изделие – 1 пар;
- потребительская упаковка с нанесенной инструкцией по применению – 1 штука.

Исполнители:
Фабрика ОПС

Применять по назначению врача. Изделие многократно используется. Изделие изготовлено на заказ, т.е. конструкция учитывает среднестатистические характеристики и параметры стоп пациентов по диаметру группы людей и изготавливается на обязательном этапе.

КРЕЙТ



СТЕЛКИ
ортопедические – «Крейт», СКП-24

СКП-24

СТЕЛКИ
ортопедические –
«Крейт», СКП-24

Настоящая инструкция является частью комплекта документов, входящих в комплект поставки изделия. Инструкция должна быть сохранена и использоваться в соответствии с требованиями. Инструкция должна быть сохранена и использоваться в соответствии с требованиями. Инструкция должна быть сохранена и использоваться в соответствии с требованиями.



Регистрационное удостоверение
Стельки ортопедические и корригирующие приспособления для стопы «Крейт». Стельки ортопедические «Крейт», СКП-24. Транспортировка и хранение: транспортировать изделия в соответствии с условиями хранения 5. ГОСТ 15150, но для температуры от -40 °С до +40 °С. Изделия в упаковке должны храниться на стельках в закрытых сухих помещениях при температуре от 15 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха от 50 % до 80% и не более, чем на 1 м от обогревательных приборов. Использование: изделие складывают в конверты или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.684.
Дата изготовления: 20 1.

СТЕЛКИ
ортопедические -
«Крейт», СКП-23

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

CELESTA PAC TOLONG KAMI BERSAMA SAMA

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Стельки ортопедические – «Крейт», СКП-23 предназначены для защиты стоп от переохлаждения и профилактики комбинированного плоскостопия для зимней и демисезонной обуви с каблуком до 5 см.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей, варикозная болезнь, избыточный вес, беременность, длительное пребывание на ногах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Необходимость индивидуального ортезирования стопы, открытые и кровоточащие раны, аллергическая реакция на материалы.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Степками должны эксплуатироваться в стандартной обуви на низком или среднем каблуке, соответствующего размера. При использовании ортопедических стелек стопа принимает внутри обуви правильное (корригированное) положение, поэтому с новыми стельками необходимо привыкнуть. Период привыкания составляет в среднем от 1 до 7 дней. Приобретая новую обувь, примерять ее вместе со стельками. Не носить обувь со стельками на голую ногу.

Размер	Длина стога, м	Масса готового из 1 куб. м, т ±2,0 %
35	225	109,2
36	230	114,4
37	235	121,8
38	245	134,3
39	250	139,2
40	255	144,6
41	265	149,7
42	270	151,1
43	275	157,8
44	285	161,9
45	290	164,3
46	295	158,2
47	305	171,0

ИЗМЕНЕНИЯ:

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Применять, соблюдая **предосторожности**, указанные в таблице размеров. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила утилизации, обозначенные на упаковке. Не использовать вблизи открытого пламени.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

Рекомендуется сухая чистка. Стельки необходимо ежедневно просушивать при комнатной температуре. Стельки можно стирать на низкотемпературном режиме стирки (30 °C) в том числе с использованием (раствора порока) и без него. Устойчива к пятнам.

Состав: полиуретан - 80%,
полиэфир - 10%, шерсть - 10%.

Комплект поставки включает:

- изделие – 1 пара;
- потребительская упаковка с нанесённой инструкцией по применению – 1 штука.

Отметка ОТК:

Применять по назначению врача. Изделие многоразового использования. Нестерильно. Изделие изготовлено на подбор, т.е. конструкция учитывает среднестатистические характеристики и параметры стоп одоморожденных по диагнозу группы людей и изготавливается на индивидуального потребителя.



СКП-23

СТЕЛЬКИ

ортопедические –
«Крейт», СКП-23

[illegible]

СТЕЛКИ ортопедические детские – «Крейт», СК-214

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Стельки ортопедические детские – «Крейт», СК-214 предназначены для детской обуви с высоким жестким задником для коррекции деформаций стоп у детей в том числе в сочетании с вальгусом или вертисом заднего и среднего отделов стопы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Коррекция статических и нефиксированных деформаций стоп у детей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Необходимость индивидуального ортезирования стопы, открытые и кровоточащие раны, аллергическая реакция на материалы.

ПОСЛЕДНИЙ ДИСКУССИОН:

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Стельки должны вставляться в стандартной обуви на низком или среднем каблуке, соответствующего размера. При использовании ортопедических стелек стопа принимает внутри обуви правильное (использованное) положение, поэтому и новые стельки необходимо пришивать. Период привыкания составляет в среднем от 1 до 7 дней. Приобретая новую обувь, примерять ее вместе со стельками. Не носить обувь со стельками на голую ногу.

Размер	Длина стопы, мм	Максимальная масса, г ±20%
22,5	140	35,7
23	145	37,2
24	150	38,8
25	155	40,3
25,5	160	41,9
26	165	43,4
27	170	45,0
28	175	47,1
28,5	180	49,1
29	185	51,0
30	190	53,4
31	195	56,2
32	205	59,2
33	210	62,3
34	215	65,5
35	225	68,6
36	230	71,6

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице размеров. Не допускается применение по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения: срок хранения и правила ухода, описанные на упаковке. Не использовать вблизи открытого пламени.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

Допускается проводить гигиеническую обработку изделий мыльной тканью, увлажненной нейтральными моющими средствами. Стельки необходимо ежедневно просушивать при комнатной температуре. Стельки нельзя сушить на нагревательных поверхностях (в том числе обогревательных радиаторах) и вблизи источников тепла.

Состав: нейлон – 40%, кожа КРС – 37%, поливинилхлорид – 23%.

Комплект поставки включает:

– изделие – 1 пара;
– потребительская упаковка с нанесенной инструкцией по применению – 1 штука.

Номер партии

Отметка ОТК:

Применять по назначению врача. Изделие многократного использования. Нестерильно. Изделие изготовлено на подбор, т.е. конструкция учитывает среднестатистические характеристики и параметры стоп однородной по длине группы людей в возрасте 14 лет и не обязана соответствовать потребителя.

КРЕЙТ



СТЕЛКИ
ортопедические детские – «Крейт», СК-214

СК-214

СТЕЛКИ
ортопедические детские –
«Крейт», СК-214

Регистрационное удостоверение №

Стельки ортопедические и корректирующие приспособления для стопы – «КРЕЙТ». Стельки ортопедические детские – «Крейт», СК-214. Транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с условиями хранения 5. ГОСТ 15150, но для температуры от 40 °С до 40 °С. Изделия в упаковке должны храниться на складах в закрытых сухих помещениях при температуре от 15 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха от 50 % до 80 % и не ближе, чем на 1 м от обогревательных приборов. Использование изделий складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684.

Дата изготовления

20

Информация об изделии и условиях его применения: «Крейт», СК-214. Стельки ортопедические и корректирующие приспособления для стопы – «КРЕЙТ». Стельки ортопедические детские – «Крейт», СК-214. Транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с условиями хранения 5. ГОСТ 15150, но для температуры от 40 °С до 40 °С. Изделия в упаковке должны храниться на складах в закрытых сухих помещениях при температуре от 15 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха от 50 % до 80 % и не ближе, чем на 1 м от обогревательных приборов. Использование изделий складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684.

ВКЛАДЫШИ

ортопедические под продольный
свод стопы – «Крейт», СК-168

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Напугательная ленточка

Основание из EVA

Двухсторонняя клейкая лента

НАЗНАЧЕНИЕ:

Вкладыш ортопедический под продольный свод стопы – «Крейт», СК-168 предназначен для профилактики продольного плоскостопия.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Профилактика продольного плоскостопия

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Наличие острых воспалительных заболеваний стопы, открытых и кровоточащих ран, аллергическая реакция на материалы.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Вкладыш необходимо вложить в среднюю часть обуви, размещая его под продольным сводом стопы и приклеить с помощью фиксатора.

Период привыкания составляет в среднем от 1 до 7 дней. Приобретая новую обувь, проверять ее вместе с вкладышем.

Размер	Длина стопы, мм	Размер обуви	Масса, г +20%
S	225-245	35-38	23,6
M	250-270	39-42	24,8
L	275-290	43-45	26,5

Состав: этиленвинилацетат – 55%,
Каучук – 30%, полипропилен – 5%,
полиэтилен – 5%, синтетический
каучук – 5%.

Комплект поставки включает:

- изделие – 1 пара;
- потребительская упаковка с нанесенной инструкцией по применению – 1 штука.

Маркировка:

Отметка ОТК:

Применять по назначению врача. Изделие многократно использовано. Небеспокойно. Изделие изготовлено на подборт, т.е. конструкция учитывает среднестатистические характеристики и параметры стоп однородной по диагнозу группы людей и изготавливается на обозначенного потребителя.

КРЕЙТ



ВКЛАДЫШИ
ортопедические под продольный
свод стопы – «Крейт», СК-168

СК-168

ВКЛАДЫШИ

ортопедические под продольный
свод стопы – «Крейт», СК-168

Регистрационное удостоверение №
Стежки ортопедические и корригирующие приспособления для стопы – «КРЕЙТ». Вкладыш ортопедический под продольный свод стопы – «Крейт», СК-168. Транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150, но для температуры от -40 °С до +40 °С. Изделия в упаковке должны храниться на стеллажах в закрытых сухих помещениях при температуре от 15 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха от 50% до 80% и не ближе, чем на 1 м от обогревательных приборов. Использованные изделия складывают в контейнеры или паллеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684.
Дата изготовления: 20 г.

Продукция изготовлена на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Вкладыш ортопедический под продольный свод стопы – «Крейт», СК-168. Транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150, но для температуры от -40 °С до +40 °С. Изделия в упаковке должны храниться на стеллажах в закрытых сухих помещениях при температуре от 15 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха от 50% до 80% и не ближе, чем на 1 м от обогревательных приборов. Использованные изделия складывают в контейнеры или паллеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684.

ВКЛАДЫШИ ортопедические под передний отдел стопы – «Крейт», СК-164


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Натуральная кожа

Валя из Зейца из упругого мягкого материала

Двусторонняя клейкая лента

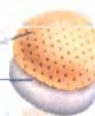

НАЗНАЧЕНИЕ:

Вкладыш ортопедический под передний отдел стопы – «Крейт», СК-164. Предназначен для профилактики образования натоптышей при повышенной нагрузке на передний отдел стопы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Профилактика уплощения переднего отдела стопы, профилактика образования мозолей и натоптышей в переднем отделе стопы, профилактика образования натоптышей при повышенной нагрузке на передний отдел стопы, боли в переднем отделе стопы любой этиологии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Необходимость индивидуального ортогопедического стельки, открытие и кровоточащие раны, аллергия на материалы.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Вкладыш необходимо вложить в передний отдел обуви и приклеить с помощью фена. Период привыкания составляет в среднем от 1 до 7 дней, приобретая новую обувь, приносить ее вместе с вкладышами.

Размер	Длина с швом, мм	Масса, г ±2%
S	225-235	4,0
M	235-240	5,0

Состав: Кожа ЮС – 35%, полиуретан – 35%, поликарбонат – 10%, полипропилен – 10%, синтетическая нить – 10%.

Исходный пакет.

Схема СК-164

Применять по назначению врача. Изделие многократного использования. Не стирать. Изделие изготовлено на заказ, т.е. конструкция учитывает среднестатистические характеристики и параметры стопы однородной по длине группы людей и изготавливается на обозначенного потребителя.

ВКЛАДЫШИ
ортопедические под передний
отдел стопы – «Крейт», СК-164

 КРЕЙТ



СК-164

ВКЛАДЫШИ
ортопедические под передний
отдел стопы – «Крейт», СК-164

Регистрационное удостоверение
Стежки ортопедические и корректирующие приспособления для стопы – «КРЕЙТ». Вкладыш ортопедический под передний отдел стопы – «Крейт», СК-164. Транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с условиями хранения. 5 ГОСТ 15150, по дате температуры: от -40 °С до +40 °С. Изделия в упаковке должны храниться на стеллажах в закрытых сухих помещениях при температуре от 15 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха от 50 % до 80% и не ближе, чем на 1 м от оборотных приборов. Использование изделия: складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684.
Дата изготовления: 20

«Громадська організація «Сприяння соціальної адаптації громадян України до умов життя в Україні» (ООО «Сприяння»). Адреса: 19520-07, Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д.11, корпус 4, литер А, пом. 11. Контакт: тел. (800) 710-68-58, email: info@spriannya.ru, www.spriannya.ru; сайт: spriannya.ru; ул. Пушкина, д. 10, лит. А, пом. 11. Контакт: тел. (800) 710-68-58, email: info@spriannya.ru, www.spriannya.ru; сайт: spriannya.ru. Методика «Гриб» соответствует требованиям «Положения об условиях предоставления государственной услуги по предоставлению информации о деятельности некоммерческих организаций, занимающихся благотворительной деятельностью и выполнению социальных проектов» (утверждено приказом Минюста России от 11.03.2010 № 104/н).

ортопедические под передний
отдел стопы – «Крейт», СК-158

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

НАТУРАЛЬНЫЕ ЛОЖИ

Валик износ из упругого мягкого материала

Двусторонняя клеевая лента



НАЗНАЧЕНИЕ:
Вспомогательное оборудование для переднего отдела с топом - «Крест», ОА-158. Применяется для
профилировки борозд во время чистоты в при плановых и аварийных нагрузках на передний отдел стана.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Профилактика уплощения переднего отдела стопы, профилактика образования впадин и натоптышей в переднем отделе стопы, профилактика образования натоптышей при повышенной нагрузке на передний отдел стопы, боли в переднем отделе стопы любой этиологии.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Необходимость индивидуального ортопедического стопа, открытые и кровоточащие раны, аллергические реакции на материалы

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Контактный дерматит при использовании «Релер» — следствие материалов и клея.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Владельцу необходимо вложить в передний отдел обуви и пришить с помощью фиксатора. Период пришивания составляет в среднем от 1 до 7 дней, приобретая новую обувь, примерять ее вместе с владельцами.

Получено	Среднее значение	Норматив
Универс	20% 245	1,1

Состав: Кожа КРС – 35%, полиуретан – 35%, полиакрилонитрил – 10%, полипропилен – 10%, синтетическая каучук – 10%.

How long negative

Operating QTR:

Применять по назначению врача. Надежные многократового использования. Нестерильные. Изделие изготовлено на заказ, с.е. конструкция учитывает среднестатистические характеристики и параметры стоп однородной по давлению группы людей и изготавливается на обезличенного потребителя.

ВКЛАДЫШИ
ортопедические под передний
отдел стопы – «Крейт», СК-158



CK-158

ортопедические под передний
отдел стопы – «Крейт», СК-158

[illegible]

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ



Натуральная кожа
Амортизирующая
вставка
Двухсторонняя
клеякая лента

НАЗНАЧЕНИЕ:

Вкладыши ортопедические в задник обуви – «Крейт», СК-157 предназначены для ношения в закрытой обуви с целью профилактики образования мозолей и потертостей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Профилактика появления мозолей и потертостей в области ахиллова сухожилия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Необходимость индивидуального ортезирования стопы, открытые и кровоточащие раны, аллергическая реакция на материалы.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Повочные действия:
Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделий.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:
Вкладыши необходимо разместить на внутренней части задней стенки обуви и приклеить с помощью фиксатора.

Состав: Кожа КРС – 35%,
полиуретан – 35%, полихлоропрен –
10%, полипропилен – 10%,
синтетический каучук – 10%.

Комплект поставки включает:
- изделие – 1 пара;
- потребительская упаковка
с нанесённой инструкцией
по применению – 1 штука.

Номер партии:

Отметка ОТК:

Применять по назначению врача. Изделие многоразового использования. Нестерильно. Изделие изготовлено на подбор, т.е. конструкция учитывает среднетипичные характеристики и параметры стоп однородной по диагнозу группы людей и изготавливается на обозначенного потребителя.

ВКЛАДЫШИ
ортопедические в задник обуви –
«Крейт», СК-157

CK-157

ВКЛАДЫШИ



Регистрационное удостоверение
 Система ортопедических и коррекционных приспособлений для стопы – «КЕЙТ». Вкладыши ортопедические в заднюю обувь – «КейТ», СК-1575. Транспортировка в закрытых транспортных средствах в заднюю обувь – «КейТ» хранения: 3 ГОСТ 15150, но для температуры от -20 до +40 °С, влажность воздуха не более 80%, для хранения на стеллажах в закрытых помещениях при температуре от 15 °С до 25 °С, относительная влажность воздуха не более 80% и не ближе, чем на 1 м от обзорных приборов. Использование изделия складуется в контейнер или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируется как твердые отходы отделимые от отходов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.684.

20

ВКЛАДЫШ ортопедический под передний отдел стопы – «Крейт», СК-156-2П

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Мягкий
нескользящий
материал



Натуральная кожа

Амортизирующий
слой

Прочный
пластиковый каркас

НАЗНАЧЕНИЕ:

Вкладыш ортопедический под передний отдел стопы – «Крейт», СК-156-2П. Предназначен для коррекции молоткообразной деформации пальцев стопы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Коррекция молоткообразной деформации пальцев стопы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Необходимость индивидуального ортеза свода стопы, открытые и кровоточащие раны, воспалительные процессы на стопе.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Возможная деформация при индивидуальном подборе жесткости амортизирующего слоя.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Вкладыш необходимо вставить под передний отдел стопы, продеть пальцы в петли и, подтянув ленту, прикрепить пальцы к вкладышу.

Период привыкания составляет в среднем от 1 до 7 дней; приобрести новую обувь, примерять ее вместе с вкладышами.

Размер	Длина стопы, мм	Масса, г
S	225-235	14,3
M	245-255	15,4

Состав: Кожа КРС - 28%,
искусственный войлок - 28%, полиуретан
- 28%, поливинилхлорид - 10%,
полипропилен - 6%

Комплект поставки включает:
- изделие - 1 шт;
- потребительская упаковка
с нанесенной инструкцией
по применению - 1 штука.

Номер партии:

Отметка ОТГ:

Применять по назначению врача. Изделие многоразового использования. Нестерильно. Изделие изготовлено на заказ, в.о. конструкция учитывает среднестатистические характеристики и параметры стоп однородной по давлению группы людей и изготавливается на обозначенного потребителя.

ВКЛАДЫШ
ортопедический под передний
отдел стопы – «Крейт», СК-156-2П

 КРЕЙТ



СК-156-2П

ВКЛАДЫШ
ортопедический под передний
отдел стопы – «Крейт», СК-156-2П

Регистрационное удостоверение
Стебли ортопедические и корригирующие приспособления для стопы - «КРЕЙТ». Вкладыш ортопедический под передний отдел стопы - «Крейт», СК-156-2П. Транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с условиями хранения: ГОСТ 15150, по для температуры от -40 °С до +40 °С. Изделия в упаковке должны храниться на стеллажах в закрытых сухих помещениях при температуре от 15 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха от 50 % до 80 % и не ближе, чем на 1 м от обогревательных приборов. Используемые изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов «А» и утилизируют в твердые бытовые отходы в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684.
Дата изготовления: 20

ВКЛАДЫШ
ортопедический под передний
отдел стопы – «Крейт», СК-156-1П

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Мягкий
нескользящий
материал



Натуральная кожа

Амортизирующий
слой

Прочный
пластиковый каркас

НАЗНАЧЕНИЕ:

Вкладыш ортопедический под передний отдел стопы – «Крейт», СК-156-1П. Предназначены для коррекции молоткообразных деформаций пальцев стоп.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Коррекция молоткообразных деформаций пальцев стоп.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Необходимость индивидуального ортезирования стопы, открытые и кровоточащие раны, аллергическая реакция на материалы.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделий.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Вкладыши необходимо вложить под передний отдел стопы, продеть пальцы в петли и, подтягивая ленту, притянуть пальцы к вкладышу.

Период привыкания составляет в среднем от 1 до 7 дней; приобретая новую обувь, примерять ее вместе с вкладышами.

Размер	Длина стопы, мм	Масса, г ±20%
S	225-235	14,3
M	245-255	15,4

Состав: Кожа КРС – 28%,
этиленвинилацетат – 28%, полиэстер
– 28%, поливинилхлорид – 10%,
полихлоропрен – 6%.

Комплект поставки включает:
- изделие – 1 шт;
- потребительская упаковка
с нанесённой инструкцией
по применению – 1 штука.

Номер партии:

Отметка ОТК:

Применять по назначению врача. Изделие многоразового использования. Стерильно. Изделие изготовлено на подбор, т. е. конструкция учитывает среднестатистические характеристики и параметры стоп однородной по диагнозу группы людей и изготавливается на обозначенного потребителя.

ВКЛАДЫШ
ортопедический под передний
отдел стопы – «Крейт», СК-156-1П

СК-156-1П

ВКЛАДЫШ
ортопедический под передний
отдел стопы – «Крейт», СК-156-1П



Регистрационное удостоверение
 Стелит ортопедические и корригирующие приспособления для стопы – «КРЕЙТ», вкладыши ортопедический под передний отдел стопы – «Крейт», СК-1561П. Транспортировщики в закрытых транспортных средствах в соответствии с условиями хранения: ГОСТ 15150, но не менее 10 лет. Срок годности: СК-1561П, вкладыши ортопедический под передний отдел стопы – «Крейт» до 30% до уменьшения при температуре от 15 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха от 50% до 80% и не больше, чем на 1 м от обогревательных приборов. Использование изделия складировать в контейнер или паллету для сбора отходов класса А и утилизируют на территории бытовых отходов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3654.
 Дата окончания срока действия: 20.08.2019

СТЕЛКИ ортопедические – «Крейт», СК-139

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Схема расположения элементов



НАЗНАЧЕНИЕ:

Стельки ортопедические – «Крейт», СК-139 предназначены для закрытой повседневной обуви с целью разгрузки подошвенной поверхности стопы и снижения нагрузки с головок плюсневых костей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Профилактика поперечного, продольного и комбинированного плоскостопия, заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей, варикозная болезнь, избыточный вес, беременность, длительное пребывание на ногах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Необходимость индивидуального ортезирования стопы, открытые и кровоточащие раны, аллергическая реакция на материалы.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Стельки должны эксплуатироваться в стандартной обуви на низком или среднем каблуке, соответствующего размера. При использовании ортопедических стелек стопа принимает внутри обуви правильное (корригированное) положение, поэтому к новым стелькам необходимо привыкнуть. Период привыкания составляет в среднем от 1 до 7 дней. Приобретая новую обувь, примерять её вместе со стельками. Не носить обувь со стельками на голую ногу.

Размер	Длина стопы, см	Масса в готовом изделии, г ± 2,0%
35	22,5	42,5
36	23,0	43,5
37	23,5	50,7
38	24,5	51,7
39	25,0	61,1
40	25,5	62,1
41	26,5	66,2
42	27,0	67,2
43	27,5	68,5
44	28,5	69,5
45	29,0	71,4
46	29,5	72,4
47	30,5	73,3

Изготовитель:
Оптика-2000

Применять по назначению врача. Изделие выносового использования. Мастерство. Изделие изготавливается на подбор, т.е. конструкция ушивается с учетом индивидуальных особенностей стопы и параметров стопы по димензии группы, площадь и изготавливается на основании потребителя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Применять, соблюдая меры предосторожности, указанные в таблице размеров. Не допускать попадания на изделие влаги, пыли, грязи. Соблюдать условия хранения, срок хранения и правила утилизации, обозначенные на упаковке. Не использовать изделие в открытом пламени.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

Допускается стирать изделие вручную при температуре не выше 40°C. Изделие можно стирать в стиральной машине. Стирать изделие отдельно от других вещей. Стирать изделие при комнатной температуре. Стирать изделие на низкотемпературной стирке. Стирать изделие на низкотемпературной стирке. Стирать изделие на низкотемпературной стирке.

Состав: Полипропиленовый – 80%,
акриловый – 20%.

Количество слоев включает:
1. Полипропиленовый слой;
2. Полипропиленовый слой;
3. Полипропиленовый слой;
4. Полипропиленовый слой.

СТЕЛКИ ортопедические – «Крейт», СК-139

КРЕЙТ



СК-139

СТЕЛКИ ортопедические – «Крейт», СК-139

Применять по назначению врача. Изделие выносового использования. Мастерство. Изделие изготавливается на подбор, т.е. конструкция ушивается с учетом индивидуальных особенностей стопы и параметров стопы по димензии группы, площадь и изготавливается на основании потребителя.



Регистрационное удостоверение
Стельки ортопедические и корригирующие приспособления для стопы – «КРЕЙТ». Стельки ортопедические – «Крейт», СК-139. Транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с условиями хранения. ГОСТ 15150, не для температуры от -40°C до +40°C. Изделия в упаковке должны храниться на стеллажах в закрытых сухих помещениях при температуре от 15°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 50% до 80% и не более, чем на 1 м от оборудования. Использование изделия складывать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.684.
Дата изготовления: 20

ортопедический под передний
отдел стопы – «Крейт», СК-155-1П

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

**Матрица
используемый
МАТЕРИАЛ**



натуральная кожа
Валик Зейца из
упругого мягкого
материала
Амортизирующий
слой
Прочный
пластиковый каркас

НАЗНАЧЕНИЕ:

НАЗНАЧЕНИЕ:
Вкладыш ортопедический под передний отдел стопы – «Крейт», СК-155-1П предназначен для коррекции молоткообразных деформаций пальцев стоп

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Коррекция молоткообразных деформаций пальцев стоп.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Необходимость индивидуального ортотирования стопы, стертые и кровоточащие раны, аллергические реакции на материалы.

ПОВОРОТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Вкладыш необходимо вложить под передний отдел стопы, продеть пальцы в петли и, подтягивая ленту, притянуть пальцы к вкладышу.

Период привыкания составляет в среднем от 1 до 7 дней. Приобретен новую обувь, примерять ее вместе с вкладышами.

Размер	Длина стопы, мм	Масса, г ±20%
S	225-235	20,0
M	245-255	22,2
L	265-275	24,3

Состав: Кожа КРС - 25%,
этиленамилацетат - 25%, икра -
25%, поливинилпирролидон - 10%,
полиэстер - 5%, полиуретан - 5%,
полихлоропрен - 5%.

Комплект поставки включает:

- изделие - 1 шт;
- потребительская упаковка
с нанесенной инструкцией
по применению - 1 штука

Message Page/From:

Overweight OTR

Применять по назначению врача. Изделие многократного использования. Нестерильно. Изделие изготовлено на заказ, т.е. конструкция учитывает среднестатистические характеристики и параметры стоп однородной по диагозу группы людей и изготавливается на обозначенного потребителя.

ВКЛАДЫШ
ортопедический под передний
отдел стопы – «Крейт», СК-155-1П

СК-155-1П

ортопедический под передний
отдел стопы – «Крейт», СК-155-1П

[illegible][illegible]

 ООО ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СТЕЛКИ ортопедические – «Крейт», СК-143

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Стельки ортопедические – «Крейт», СК-143 предназначены для закрытой повседневной обуви с целью разгрузки подошвенной поверхности стопы и снижения нагрузки с головок плюсневых костей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Профилактика поперечного, продольного и комбинированного плоскостопия, заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей, варикозная болезнь, избыточный вес, беременность, длительное пребывание на ногах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Необходимость индивидуального ортезирования стопы, открытые и кровоточащие раны, аллергическая реакция на материалы.

ПОВТОРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Стельки должны эксплуатироваться в стандартной обуви на низком или среднем каблуке, соответствующего размера. При использовании ортопедических стелек стопа принимает внутри обуви правильное (корректированное) положение, поэтому к новым стелькам необходимо привыкнуть. Период привыкания составляет в среднем от 1 до 7 дней. Приобретая новую обувь, примерять её вместе со стельками. Не носить обувь со стельками на голую ногу.

Размер	Длина стопы, мм	Масса готового изделия, г ±20%
35	225	81,0
36	230	82,2
37	235	87,2
38	245	88,8
39	250	103,3
40	255	103,5
41	265	118,7
42	270	119,4
43	275	119,9
44	285	120,7
45	290	127,8
46	295	130,1
47	305	130,5

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице размеров. Не допускается применение по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения: срок хранения в упаковке 3 года, обозначенный на упаковке. Не использовать вблизи открытого пламени.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

Допускается проводить гигиеническую обработку изделий теплой проточной, умеренной концентрацией моющих средств. Стельки необходимо своевременно просушивать при комнатной температуре. Стельки нельзя стирать на стиральной машине (в том числе автоматической) и вблизи источников тепла.

Состав: Платекс – 25%, микрополимер – 25%, нейлон – 17%, полипропилен – 17%, полиуретан – 8%, полиадоропрен – 8%.

Классификация по классу изделия:

– классификация: 1 класс;
– по потребностям: универсальная;
– с нанесенной инструкцией по применению – 1 штука.

Применять по назначению врача. Изделие много разового использования. Нестерильно. Изделие изготовлено на подбор, т.е. конструкция учитывает индивидуальные характеристики и параметры стопы заказчика. Не рекомендуется применять изделие и изготавливается на основании индивидуального заказа.

КРЕЙТ



СТЕЛКИ
ортопедические – «Крейт», СК-143

СК-143

СТЕЛКИ
ортопедические –
«Крейт», СК-143

Продукция «Крейт» зарегистрирована в Роспатенте (Роспатент № 2015/1100000, дата регистрации 15.05.2015).
Копия 4, лист 1, от 28.11.2015, № 2015/1100000, дата регистрации 15.05.2015.
Место производства: Московская область, г. Мытищи, ул. Вульфсона, д. 10, стр. 18. Контакт: 8 (495) 321-11-11.
Условия хранения: в сухом, защищенном от влаги и света месте, при температуре от 15°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 50% до 80% и не более, чем на 1 м от обогревательных приборов. Исполнительное изделие складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.684.
Дата изготовления: 20.11.2015.



Регистрационное удостоверение
Стельки ортопедические и корректирующие приспособления для стопы «Крейт». Стельки ортопедические «Крейт», СК-143. Ортопедические и корректирующие приспособления в соответствии с условиями хранения: ГОСТ 15150, не для температуры от -40°C до +40°C. Изделия в упаковке должны храниться на стеллажах в закрытых сухих помещениях при температуре от 15°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 50% до 80% и не более, чем на 1 м от обогревательных приборов. Исполнительное изделие складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.684.
Дата изготовления: 20.11.2015.

2

CYENA PACIFIC OYSTER INC. & ASSOCIATES



Стельки ортопедические - «Крейт». СК-137 предназначены для повседневной обуви с целью разгрузки голеностопных и коленных суставов и снижения нагрузки на позвоночник.

профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, комплексное лечение hallus valgus, заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей, варикозная болезнь, избыточный вес, беременность, длительное пребывание на ногах.

Необходимость индивидуального ортезирования стопы, открытые и кровоточащие раны, аллергическая реакция на материалы.

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

Стежки должны эксплуатироваться в стандартной обуви на низком или среднем каблуке, соответствующего размера. При использовании ортопедических стелек стола принимаем внутри обуви правильное (корректированное) положение, поэтому к новым стелькам необходимо привыкнуть. Период привыкания составляет в среднем от 1 до 7 дней. Приобретая новую обувь, примерять ее вместе со стельками. Не носить обувь со стельками на голую ногу.

Размер	Длина стопы, см	Масса готового изделия, г
35	225	123,5
36	230	125,4
37	235	126,8
38	245	128,5
39	250	130,1
40	255	131,9
41	265	146,1
42	270	148,2
43	275	154,7
44	285	163,2
45	290	174,7
46	295	176,8
47	305	180,2

Примечание. соблюдать размеры, указанные в таблице размеров. Не допускать прижимов на внутренних углах элементов. Не допускать соблюдения условий срезов. Срез прижимов в пределах резьбы, обозначенные на устройстве. Не использовать болты на открытом пространстве.

Допускается проводить газменную обработку изделий мягкой тканью, средствами. Стелыми необходимо последовательно просушивать при комнатной температуре. Стелыми нельзя сушить на нагревательных поверхностях (в том числе на обогревательных радиаторах) и вблизи источников тепла.

Сокращ. Конт. КРС - 90%

- изделие - 1 пара;
- потребительская упаковка с нанесённой инструкцией

Применять по назначению врача. Издание многократного использования. Нестерильно. Издание изготовлено на подбор, т.е. конструкция учитывает среднестатистические характеристики и параметры: стои однородной по диагнозу группы людей и изготавливается на обезличенного потребителя.



СТЕЛКИ ортопедические – «Крейт», СК-137

[illegible]

СТЕЛКИ ортопедические – «Крейт», СК-133

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Схема расположения элементов



НАЗНАЧЕНИЕ:

Стельки ортопедические – «Крейт», СК-133 предназначены для повседневной обуви с целью разгрузки голеностопных и коленных суставов и снижения нагрузки на позвоночник.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей, варикозная болезнь, избыточный вес, беременность, длительное пребывание на ногах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Необходимость индивидуального ортезирования стопы, открытые и кровоточащие раны, аллергическая реакция на материалы.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Стельки должны эксплуатироваться в стандартной обуви на низком или среднем каблуке, соответствующего размера. При использовании ортопедических стелек стопа принимает внутри обуви правильное (корректированное) положение, поэтому к новым стелькам необходимо привыкнуть. Период привыкания составляет в среднем от 1 до 7 дней. Приобретая новую обувь, примерять её вместе со стельками. Не носить обувь со стельками на голую ногу.

Размер	Длина стельки, см	Масса готовой стельки, г ±20 %
35	225	95,4
36	230	97,6
37	235	99,3
38	245	102,6
39	250	108,7
40	255	112,9
41	263	115,1
42	270	118,3
43	275	121,7
44	285	124,9
45	290	131,2
46	295	135,8
47	305	137,2

Имя автора:
Стельки: СК-133

Применять по назначению врача. Изделие многоуровневого использования. Нестерильно. Изделие изготовлено на заказ, т.е. конструкция учитывает среднестатистические характеристики и параметры стоп определенной по диаметру группы людей и изготавливается на основании их анатомии.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Применять в соответствии с рекомендациями, указанными в таблицах размеров. Не допускается применять по назначению обувь, имеющую дефекты. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на упаковке. Не использовать вблизи открытого пламени.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

Допускается проводить гигиеническую обработку изделий мягкой тряпкой, увлажненной нейтральными моющими средствами. Стельки необходимо ежедневно просушивать при комнатной температуре. Стельки нельзя сушить на нагревательных поверхностях (в том числе обогревательных радиаторов) и вблизи источников тепла.

Состав: Эпипропиленполиуретан – 80%, пенополиуретан – 20%.

Классификация изделия:
изделие – 1 класс;
- погребительский упаковки с нанесенной инструкцией по применению – 1 группа.

СТЕЛКИ
ортопедические – «Крейт», СК-133

СК-133

СТЕЛКИ
ортопедические –
«Крейт», СК-133

Применять по назначению врача. Изделие многоуровневого использования. Нестерильно. Изделие изготовлено на заказ, т.е. конструкция учитывает среднестатистические характеристики и параметры стоп определенной по диаметру группы людей и изготавливается на основании их анатомии.



Информационное приложение
Стельки ортопедические и комбинированные предназначены для стопы «Крейт». Стельки ортопедические – «Крейт», СК-133, предназначены и являются комбинированными изделиями и соответствуют требованиям стандарта ГОСТ 15150 на изделия из полимеров. Они имеют форму, соответствующую анатомии стопы человека. При температуре от 15 °C до 25 °C и относительной влажности воздуха от 60 % до 80 % и при давлении, не превышающем 1013 гПа, изделия должны сохранять форму и свойства не менее 10 лет. Срок службы изделия 10 лет. Дата изготовления: 2020 г.

СТЕЛЬКИ

ортопедические –
«Крейт», СК-119

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Стельки ортопедические – «Крейт», СК-119 предназначены для поглощения ударной нагрузки на стопы и ношения в повседневной обуви с каблуком до 5 см

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей, варикозная болезнь, избыточный вес, беременность, длительное пребывание на ногах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Необходимость индивидуального ортезирования стопы, открытые и кровоточащие раны, аллергическая реакция на материалы.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Стежки должны эксплуатироваться в стандартной обуви на низком или среднем каблуке, соответствующего размера. При использовании ортопедических стелек стопа принимает внутри обуви правильное (корригированное) положение, поэтому к новым стелькам необходимо привыкнуть. Период привыкания составляет в среднем от 1 до 7 дней. Приобретая новую обувь, примерять ее вместе со стельками. Не носить обувь со стельками на голую ногу.

Размер	Длина стопы, см	Масса готового изделия, г ± 20 %
35	225	55,8
36	230	65,8
37	235	75,0
38	245	76,3
39	250	83,6
40	255	84,5
41	265	93,9
42	270	96,2
43	275	102,9
44	285	105,8
45	290	118,2
46	295	124,9
47	305	126,2

Keywords: *aggression, antisocial behavior, children, delinquency, risk factors*

550000

Применять по назначению врача. Издание многоязыкового использования. Нестерильно. Издание изготовлено на подбор, т.е. конструкция учитывает среднестатистические характеристики и параметры стоп однородной по физиологии группы людей и изготавливается на основании среднего потребления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Прячась, соблюдая (защитно)
указание в таблице: делиться. Не
допускается приходить на занятия
сроа (сроа) (сроа) (сроа) (сроа)
соблюдать условия хранения, срок
хранения и правила утилизации, обозначен-
ные на упаковке. Не использовать
ближе открытого пламени.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

Для этого требуется проводить тщательнейшую обработку и отделку внешней трикотажной поверхности нейтральными моющими средствами. Стелю необходимо ежедневно просушивать при комнатной температуре. Стелю нельзя сушить на открытом воздухе (прямые солнечные лучи, ветер, обледенение, перепады температур) и вблизи источников тепла.

Состав: Резина КРС - 30%, полиэстер - 30%, полипропилен - 15%, полиуретан - 5%, полихлоропрен - 3%.

Keywords: the family; caregivers

анализи = 1 наред;


с нанесённой инструкцией
по применению) = 1 штука.

СТЕЛКИ
ортопедические – «Крейт», СК-119

CK-119

СТЕЛЬКИ

ортопедические –
«Крейт», СК-119

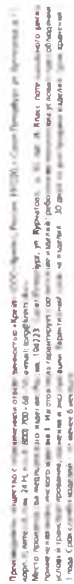[illegible]

ортопедические –
«Крейт», СК-117

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Стельки ортопедические – «Крейт», СК-117 предназначены для повседневной обуви с целью разгрузки голеностопных и коленных суставов и снижения нагрузки на позвоночник

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей, варикозная болезнь, избыточный вес, беременность, длительное пребывание на ногах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Необходимость индивидуального ортезирования стопы, открытые и кровоточащие раны, аллергическая реакция на материалы.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Стежки должны эксплуатироваться в стандартной обуви на низком или среднем каблуке, соответствующего размера. При использовании ортопедических стелек стопа принимает внутри обуви правильное (корригируемое) положение, поэтому к новым стелькам необходимо привыкнуть. Период привыкания составляет в среднем от 1 до 7 дней. Приобретая новую обувь, примерять ее вместе со стельками. Не носить обувь со стельками на голую ногу.

Размер	Длина стопы, см	Масса готового изделия при $\rho = 20\%$
35	225	81,2
36	230	84,0
37	235	91,4
38	245	108,7
39	250	113,1
40	255	120,6
41	265	124,2
42	270	130,4
43	275	132,5
44	285	134,3
45	290	135,8
46	295	136,2
47	305	139,5

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Применять, соблюдая правила, установленные в таблице размеров для конструкций, применяемых по назначению хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, сроки хранения и правила ухода, обеспечивающие их сохранность. Не использовать обшивку створок поддона.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

Должна проводиться тщательная обводка медленными слоями, укладка должна производиться средствами. Стелы должны немедленно просушиваться при комнатной температуре. Стелы нельзя сушить на нагревательных поверхностях (в том числе на обогревательных радиаторах) и вблизи источников тепла.

Состав: Этиленвинилацетат - 80%,
изопропилен - 20%

Комплект поставки: 1 шт.

- жидкость - 1 литр.
- натуральным уксусом с натуральной кислотностью по рецептуре - 1 штучка.

Howser party

Отметка ОТК

Применять по назначению врач. Мидеазе многоразового применения. Мидеазе. Мидеазе изготавливается на подбор, т.е. конструкция учитывает среднестатистические характеристики и параметры стоп одного человека по данной группе людей и изготавливается на обозначенного потребителя.



CK-117

СТЕЛЬКИ
ортопедические –
«Крейт», СК-117



Список использованных источников:

1. Справочник гидропроектировщика // Инженерные справочные данные. – М.: «ИНТЕРПРЕСС», 1999. – 1000 с.
2. Мухоморов, В.В. Проектирование и монтаж гидравлических систем. – М.: «Машинное строительство», 1991. – 100 с.
3. Мухоморов, В.В. Проектирование и монтаж гидравлических систем. – М.: «Машинное строительство», 1991. – 100 с.
4. Мухоморов, В.В. Проектирование и монтаж гидравлических систем. – М.: «Машинное строительство», 1991. – 100 с.
5. Мухоморов, В.В. Проектирование и монтаж гидравлических систем. – М.: «Машинное строительство», 1991. – 100 с.
6. Мухоморов, В.В. Проектирование и монтаж гидравлических систем. – М.: «Машинное строительство», 1991. – 100 с.
7. Мухоморов, В.В. Проектирование и монтаж гидравлических систем. – М.: «Машинное строительство», 1991. – 100 с.
8. Мухоморов, В.В. Проектирование и монтаж гидравлических систем. – М.: «Машинное строительство», 1991. – 100 с.
9. Мухоморов, В.В. Проектирование и монтаж гидравлических систем. – М.: «Машинное строительство», 1991. – 100 с.
10. Мухоморов, В.В. Проектирование и монтаж гидравлических систем. – М.: «Машинное строительство», 1991. – 100 с.

СТЕЛКИ ортопедические – «Крейт», СК-113

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Стельки ортопедические – «Крейт», СК-113. Предназначены для профилактики продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия и ношения в повседневной и модельной обуви с каблуком до 7 см.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей, варикозная болезнь, избыточный вес, беременность, длительное пребывание на ногах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Необходимость индивидуального ортезирования стопы, открытые и кровоточащие раны, аллергическая реакция на материалы.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Стельки должны эксплуатироваться в стандартной обуви на низком или среднем каблуке, соответствующего размера. При использовании ортопедических стелек стопа принимает внутри обуви правильное (корректированное) положение, поэтому к новым стелькам необходимо привыкнуть. Период привыкания составляет в среднем от 1 до 7 дней. Приобретая новую обувь, примерять её вместе со стельками. Не носить обувь со стельками на голую ногу.

Размер	Длина стопы, мм	Масса готового изделия, г ± 2,30%
35	225	37,1
36	230	37,9
37	235	42,4
38	245	43,5
39	250	48,1
40	255	48,5
41	265	50,1
42	270	51,2
43	275	60,0
44	285	60,6
45	290	61,8
46	295	62,0
47	305	62,3

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Примечать, соблюдать, удалять в таблицах размеров. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, соблюдение которых необходимо для использования в области открытого пламени.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:

Допускается протирать, тереть, мыть, удалять загрязнения, использовать средства ухода. Стежки необходимо периодически просушивать при комнатной температуре. Стельки нельзя сушить на отопительных приборах (в том числе обогревательных радиаторах) и вблизи источников тепла.

Состав: Углеводородный пластик – 80%, пенополиуретан – 20%.

Исполняет поставку включает:

- изделие – 1 пара;
- потребительская упаковка с нанесённой инструкцией по применению – 1 штука.

Материал верха:
Стежки EVA

Применять по назначению врача. Изделие многоразового использования. Нестерильно. Изделие изготовлено на заказ, т.е. конструкция учитывает среднестатистические характеристики в параметрах стопы однородной по физиологической группе людей и изготавливается на обозначенного потребителя.

СТЕЛКИ
ортопедические – «Крейт», СК-113

КРЕЙТ



СК-113

СТЕЛКИ
ортопедические –
«Крейт», СК-113

Внимание! Изделие предназначено для использования в обуви на низком или среднем каблуке. Не использовать по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, соблюдение которых необходимо для использования в области открытого пламени.



Регистрационное удостоверение
Стежки ортопедические и корректирующие приспособления для стопы – «КРЕЙТ». Стельки ортопедические – «Крейт», СК-113. Транспортировка и хранение транспортных средств в соответствии с условиями хранения в ГОСТ 15150, но для температуры от -40 °С до +40 °С. Изделия в упаковке должны храниться на стеллажах в закрытых сухих помещениях при температуре от 15 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха от 50 % до 80 % и не более, чем на 1 м от обогревательных приборов. Использование изделия складывает в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.684.
Дата изготовления: 20 1.

ортопедические –
«Крейт», СК-104

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

С. И. МАЛАСЛОВСКИЙ И ЕГО УЧЕНИКИ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Стельки ортопедические - «Крейт», СК-104 предназначены для поглощения ударной нагрузки на стопы и ношения в повседневной обуви с каблук до 5 см.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Профилактика продольного, поперечного и комбинированного плоскостопия, заболевания позвоночника и суставов нижних конечностей, варикозная болезнь, избыточный вес, беременность, длительное пребывание на ногах

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Необходимость индивидуального ортезирования стопы, открытые и кровоточащие раны, аллергическая реакция на материалы.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Стежки должны эксплуатироваться в стандартной обуви на низком или среднем каблуке, соответствующего размера. При использовании ортопедических стелек стола принимает внутри обуви правильное (корригированное) положение, поэтому к новым стелькам необходимо привыкнуть. Период привыкания составляет в среднем от 1 до 7 дней. Приобретая новую обувь, примерять ее вместе со стельками. Не носить обувь со стельками на голую ногу.

Размер	Длина стопы, мм	Масса готового изделия, г ±20%
35	225	70,2
36	230	71,9
37	235	76,6
38	245	79,3
39	250	80,8
40	255	80,9
41	265	97,7
42	270	101,4
43	275	103,2
44	285	110,3
45	290	110,7
46	295	121,8
47	305	122,2

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Применять, соблюдать
указанные в таблице размеры. Не
допускается применять по истечении
срока хранения. Необходимо
соблюдать условия хранения, срок
хранения и правила ухода, обозначенные
на упаковке. Не использовать
вблизи открытого пламени.

УГОД ЗА ИЗДАЛИЕМ:

Ремонтировать стены можно только в том случае, если они не являются несущими. Стены необходимо обязательно просушить при комнатной температуре. Стены можно сушить на обогревательных поверхностях (в том числе обогревательных радиаторов) и вблизи источников тепла.

Состав: Полиакрилат - 90%,
полиэфир - 14%, шерсть - 6%.

Комплект поставки включает:

- изделие - 1 шт.
- инструкция по эксплуатации
- мануальная инструкция
- гарантийный талон - 1 шт.

Orlando A. CHUE

Применять по назначению врача. Изделие многоразового использования. Мастерально. Изделие изготовлено на подбор, т.е. конструкция учитывает среднестатистические характеристики и параметры столбчатого по диаметру группы людей и изготавливается на образцового потребителя.



СТЕЛЬКИ
ортопедические – «Крейт», СК-104

CK-104

СТЕЛКИ ортопедические – «Крейт», СК-104

[illegible]

Вопросы, связанные с применением в России, 2000 г. (Росстат). Россия, 2000 г. (Росстат). 11 стр. 4, 5 стр. 6, 7 стр. 8, 9 стр. 10, 11 стр. 12, 13 стр. 14, 15 стр. 16, 17 стр. 18, 19 стр. 20, 21 стр. 22, 23 стр. 24, 25 стр. 26, 27 стр. 28, 29 стр. 30, 31 стр. 32, 33 стр. 34, 35 стр. 36, 37 стр. 38, 39 стр. 40, 41 стр. 42, 43 стр. 44, 45 стр. 46, 47 стр. 48, 49 стр. 50, 51 стр. 52, 53 стр. 54, 55 стр. 56, 57 стр. 58, 59 стр. 60, 61 стр. 62, 63 стр. 64, 65 стр. 66, 67 стр. 68, 69 стр. 70, 71 стр. 72, 73 стр. 74, 75 стр. 76, 77 стр. 78, 79 стр. 80, 81 стр. 82, 83 стр. 84, 85 стр. 86, 87 стр. 88, 89 стр. 90, 91 стр. 92, 93 стр. 94, 95 стр. 96, 97 стр. 98, 99 стр. 100, 101 стр. 102, 103 стр. 104, 105 стр. 106, 107 стр. 108, 109 стр. 110, 111 стр. 112, 113 стр. 114, 115 стр. 116, 117 стр. 118, 119 стр. 120, 121 стр. 122, 123 стр. 124, 125 стр. 126, 127 стр. 128, 129 стр. 130, 131 стр. 132, 133 стр. 134, 135 стр. 136, 137 стр. 138, 139 стр. 140, 141 стр. 142, 143 стр. 144, 145 стр. 146, 147 стр. 148, 149 стр. 150, 151 стр. 152, 153 стр. 154, 155 стр. 156, 157 стр. 158, 159 стр. 160, 161 стр. 162, 163 стр. 164, 165 стр. 166, 167 стр. 168, 169 стр. 170, 171 стр. 172, 173 стр. 174, 175 стр. 176, 177 стр. 178, 179 стр. 180, 181 стр. 182, 183 стр. 184, 185 стр. 186, 187 стр. 188, 189 стр. 190, 191 стр. 192, 193 стр. 194, 195 стр. 196, 197 стр. 198, 199 стр. 200, 201 стр. 202, 203 стр. 204, 205 стр. 206, 207 стр. 208, 209 стр. 210, 211 стр. 212, 213 стр. 214, 215 стр. 216, 217 стр. 218, 219 стр. 220, 221 стр. 222, 223 стр. 224, 225 стр. 226, 227 стр. 228, 229 стр. 230, 231 стр. 232, 233 стр. 234, 235 стр. 236, 237 стр. 238, 239 стр. 240, 241 стр. 242, 243 стр. 244, 245 стр. 246, 247 стр. 248, 249 стр. 250, 251 стр. 252, 253 стр. 254, 255 стр. 256, 257 стр. 258, 259 стр. 260, 261 стр. 262, 263 стр. 264, 265 стр. 266, 267 стр. 268, 269 стр. 270, 271 стр. 272, 273 стр. 274, 275 стр. 276, 277 стр. 278, 279 стр. 280, 281 стр. 282, 283 стр. 284, 285 стр. 286, 287 стр. 288, 289 стр. 290, 291 стр. 292, 293 стр. 294, 295 стр. 296, 297 стр. 298, 299 стр. 300, 301 стр. 302, 303 стр. 304, 305 стр. 306, 307 стр. 308, 309 стр. 310, 311 стр. 312, 313 стр. 314, 315 стр. 316, 317 стр. 318, 319 стр. 320, 321 стр. 322, 323 стр. 324, 325 стр. 326, 327 стр. 328, 329 стр. 330, 331 стр. 332, 333 стр. 334, 335 стр. 336, 337 стр. 338, 339 стр. 340, 341 стр. 342, 343 стр. 344, 345 стр. 346, 347 стр. 348, 349 стр. 350, 351 стр. 352, 353 стр. 354, 355 стр. 356, 357 стр. 358, 359 стр. 360, 361 стр. 362, 363 стр. 364, 365 стр. 366, 367 стр. 368, 369 стр. 370, 371 стр. 372, 373 стр. 374, 375 стр. 376, 377 стр. 378, 379 стр. 380, 381 стр. 382, 383 стр. 384, 385 стр. 386, 387 стр. 388, 389 стр. 390, 391 стр. 392, 393 стр. 394, 395 стр. 396, 397 стр. 398, 399 стр. 400, 401 стр. 402, 403 стр. 404, 405 стр. 406, 407 стр. 408, 409 стр. 410, 411 стр. 412, 413 стр. 414, 415 стр. 416, 417 стр. 418, 419 стр. 420, 421 стр. 422, 423 стр. 424, 425 стр. 426, 427 стр. 428, 429 стр. 430, 431 стр. 432, 433 стр. 434, 435 стр. 436, 437 стр. 438, 439 стр. 440, 441 стр. 442, 443 стр. 444, 445 стр. 446, 447 стр. 448, 449 стр. 450, 451 стр. 452, 453 стр. 454, 455 стр. 456, 457 стр. 458, 459 стр. 460, 461 стр. 462, 463 стр. 464, 465 стр. 466, 467 стр. 468, 469 стр. 470, 471 стр. 472, 473 стр. 474, 475 стр. 476, 477 стр. 478, 479 стр. 480, 481 стр. 482, 483 стр. 484, 485 стр. 486, 487 стр. 488, 489 стр. 490, 491 стр. 492, 493 стр. 494, 495 стр. 496, 497 стр. 498, 499 стр. 500, 501 стр. 502, 503 стр. 504, 505 стр. 506, 507 стр. 508, 509 стр. 510, 511 стр. 512, 513 стр. 514, 515 стр. 516, 517 стр. 518, 519 стр. 520, 521 стр. 522, 523 стр. 524, 525 стр. 526, 527 стр. 528, 529 стр. 530, 531 стр. 532, 533 стр. 534, 535 стр. 536, 537 стр. 538, 539 стр. 540, 541 стр. 542, 543 стр. 544, 545 стр. 546, 547 стр. 548, 549 стр. 550, 551 стр. 552, 553 стр. 554, 555 стр. 556, 557 стр. 558, 559 стр. 560, 561 стр. 562, 563 стр. 564, 565 стр. 566, 567 стр. 568, 569 стр. 570, 571 стр. 572, 573 стр. 574, 575 стр. 576, 577 стр. 578, 579 стр. 580, 581 стр. 582, 583 стр. 584, 585 стр. 586, 587 стр. 588, 589 стр. 590, 591 стр. 592, 593 стр. 594, 595 стр. 596, 597 стр. 598, 599 стр. 600, 601 стр. 602, 603 стр. 604, 605 стр. 606, 607 стр. 608, 609 стр. 610, 611 стр. 612, 613 стр. 614, 615 стр. 616, 617 стр. 618, 619 стр. 620, 621 стр. 622, 623 стр. 624, 625 стр. 626, 627 стр. 628, 629 стр. 630, 631 стр. 632, 633 стр. 634, 635 стр. 636, 637 стр. 638, 639 стр. 640, 641 стр. 642, 643 стр. 644, 645 стр. 646, 647 стр. 648, 649 стр. 650, 651 стр. 652, 653 стр. 654, 655 стр. 656, 657 стр. 658, 659 стр. 660, 661 стр. 662, 663 стр. 664, 665 стр. 666, 667 стр. 668, 669 стр. 670, 671 стр. 672, 673 стр. 674, 675 стр. 676, 677 стр. 678, 679 стр. 680, 681 стр. 682, 683 стр. 684, 685 стр. 686, 687 стр. 688, 689 стр. 690, 691 стр. 692, 693 стр. 694, 695 стр. 696, 697 стр. 698, 699 стр. 700, 701 стр. 702, 703 стр. 704, 705 стр. 706, 707 стр. 708, 709 стр. 710, 711 стр. 712, 713 стр. 714, 715 стр. 716, 717 стр. 718, 719 стр. 720, 721 стр. 722, 723 стр. 724, 725 стр. 726, 727 стр. 728, 729 стр. 730, 731 стр. 732, 733 стр. 734, 735 стр. 736, 737 стр. 738, 739 стр. 740, 741 стр. 742, 743 стр. 744, 745 стр. 746, 747 стр. 748, 749 стр. 750, 751 стр. 752, 753 стр. 754, 755 стр. 756, 757 стр. 758,

[illegible]

ПОДПЯТОЧНИК ортопедический корректирующий – «Крейт», СК-178-6

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Натуральная кожа

Основа из EVA

Двусторонняя клейкая лента

НАЗНАЧЕНИЕ:

Подпяточники ортопедические корректирующие – «Крейт», СК-178-6. Предназначены для компенсации укорочения нижних конечностей до 6 мм.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Компенсация укорочения нижних конечностей до 6 мм.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Необходимость индивидуального ортезирования стопы, открытые и кровоточащие раны, аллергическая реакция на материалы.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ:

Подпяточник необходимо вложить вплотную к заднику обуви и приклеить с помощью фиксатора. Период привыкания составляет в среднем от 1 до 7 дней; приобретая новую обувь, примерять ее вместе с подпяточниками.

Размер	Длина стопы, мм	Размер обуви	Масса, г ±20%
S	225-235	35-37	12,7
M	245-255	38-40	16,5
L	265-275	41-43	21,9
XL	285-305	44-47	23,4

Состав: Этиленвинилцетат – 55%,
Кожа КРС – 30%, полихлоропрен – 5%,
полипропилен – 5%, синтетический
каучук – 5%.

Комплект поставки включает:
- изделие – 1 шт;
- потребительская упаковка
с нанесенной инструкцией
по применению – 1 штука.

Номер партии:

Отметка ОТК:

Применять по назначению врача. Изделие многоразового использования. Нестерильно. Изделие изготовлено на подбор, т.е. конструкция учитывает среднестатистические характеристики и параметры стопы однородной по диагнозу группы людей и изготавливается на обозначенного потребителя.

ПОДПЯТОЧНИК ортопедический корректирующий – «Крейт», СК-178-6

СК-178-6

ПОДПЯТОЧНИК ортопедический корректирующий – «Крейт», СК-178-6

Регистрационное удостоверение №
Степень ортопедический и корректирующий приспособления для стопы – «КРЕЙТ», Подпяточник ортопедический корректирующий – «Крейт», СК-178-6. Транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с условиями хранения. 5. ГОСТ 15150, но для температуры от -40 °C до +40 °C. Изделия в упаковке должны храниться на стеллажах в закрытых сухих помещениях при температуре от 15 °C до 25 °C и относительной влажности воздуха от 50% до 80% и не ближе, чем на 1 м от обогревательных приборов. Испорченные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684.
Дата изготовления: 20 г.

Применение: изделие с ортопедическим эффектом. «Крейт», СК-178-6. Транспортировка в закрытых транспортных средствах в соответствии с условиями хранения. 5. ГОСТ 15150, но для температуры от -40 °C до +40 °C. Изделия в упаковке должны храниться на стеллажах в закрытых сухих помещениях при температуре от 15 °C до 25 °C и относительной влажности воздуха от 50% до 80% и не ближе, чем на 1 м от обогревательных приборов. Испорченные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684.

[illegible]

Двусторонняя клейкая лента

 ООО ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 35 лист(ов)

Руководитель организации

