



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «АЭРС-МЕД»

А.А. Абовян




ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.13–002–65038901– 2018**

**производства компании Общество с ограниченной ответственностью «АЭРС-МЕД»
Россия, 170001, г. Тверь, Территория Двор Пролетарки, 10 А, оф. 203**

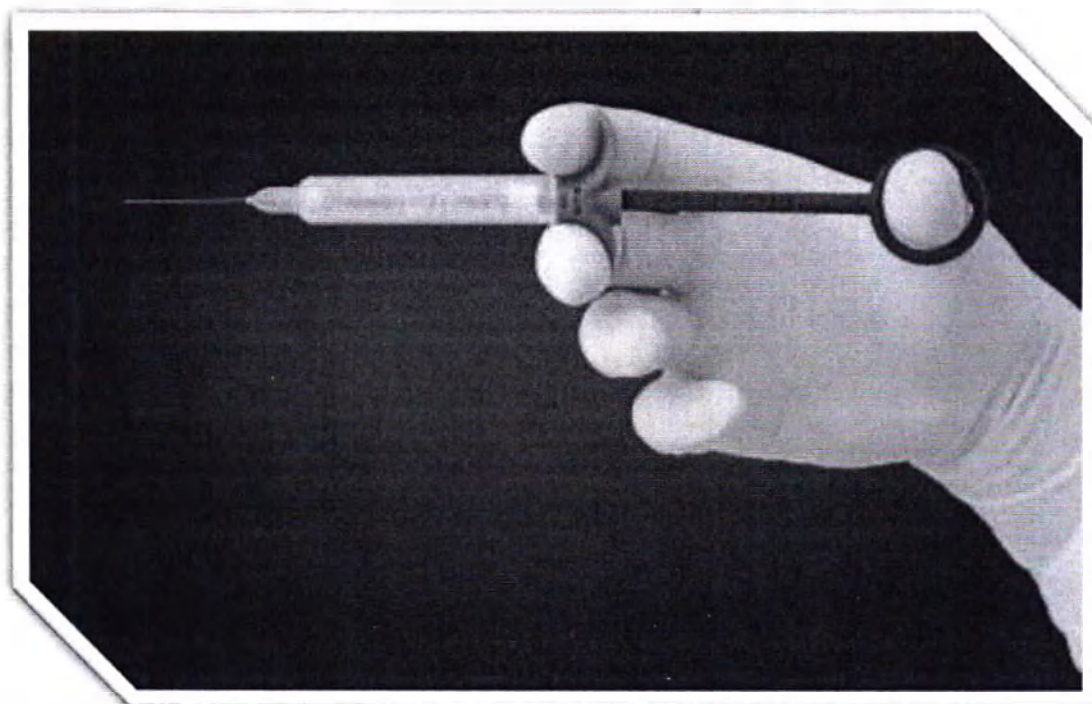

Редакция 25-05/2023

2023

Содержание

Сведения о производителе медицинского изделия	2
1. Наименование медицинского изделия.....	3
2. Область применения медицинского изделия	3
3. Назначение медицинского изделия.....	3
4. Показания для применения медицинского изделия	3
5. Противопоказания для применения медицинского изделия	3
6. Меры предосторожности при применении медицинского изделия	3
7. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия	3
8. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями	7
9. Частота и особенности использования медицинского изделия	7
10. Комплектность поставки	8
11. Техническое описание медицинского изделия	8
12. Порядок работы с медицинским изделием, требования к применению и эксплуатации медицинского изделия	11
13. Условия применения медицинского изделия	13
14. Условия эксплуатации	13
15. Срок службы (годности) и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока службы (годности)	13
16. Условия хранения	13
17. Транспортирование.....	13
18. Утилизация и уничтожение.....	13
19. Маркировка.....	14
20. Гарантийные обязательства	15
21. Требования по техническому обслуживанию медицинского изделия	15
22. Рекламация.....	15
Приложение 1	16
Приложение 2	41

Нижеприведенная инструкция составлена для целей регистрации и обращения медицинского изделия на территории Российской Федерации. Сведения предоставляются в необходимом объеме в соответствии с Правилами регистрации медицинского изделия (Постановление Правительства РФ № 1416 от 27 декабря 2012).

Сведения о производителе медицинского изделия

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «АЭРС-МЕД»
(ООО «АЭРС-МЕД»).

Юридический адрес: Россия, 170001, г. Тверь, Территория Двор Пролетарки, 10 А., оф. 203

Адрес места производства: Россия, 170001, г. Тверь, Территория Двор Пролетарки, 10 А.

1. Наименование медицинского изделия

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13–002–65038901– 2018.

2. Область применения медицинского изделия

Область применения – взрослая и детская стоматология.

Для профессионального применения в условиях ЛПУ.

3. Назначение медицинского изделия

Медицинское изделие предназначено для проведения процедуры местного обезболивания перед хирургическим вмешательством в стоматологии.

4. Показания для применения медицинского изделия

Оказание современной стоматологической помощи с применением инфильтрационной и проводниковой анестезии.

5. Противопоказания для применения медицинского изделия

Применение изделия при серьезных соматических заболеваниях или аллергии на лекарственные препараты, входящих в состав набора не допускается.

6. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Изделие предназначено только для одноразового использования

Изделия с истекшим сроком годности не следует использовать для пациентов, они подлежат утилизации.

7. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия

При использовании *Набора для стоматологических хирургических процедур, содержащего лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018* бывают осложнения, указанные в инструкции по применению на лекарственные средства:

аллергическая реакция – сильный отек слизистой;

образование гематомы (синяка) – когда кровь из капилляров попадает в мягкие ткани;

потеря чувствительности – возникает, если во время укола врач задел нерв;

спазм жевательных мышц – бывает при случайном повреждении мышц или сосудов.

7.1 Информация об обстоятельствах, при которых потребитель должен проконсультироваться с врачом

Пациенту следует проконсультироваться с врачом в случаях возникновения побочных эффектов, а также симптомов и/или состояний, являющихся противопоказаниями к применению.

7.2 Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения;

В медицинском изделии Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018 в зависимости от вариантов исполнения применяются следующие лекарственные средства:

1. Ультракаин® Д-С форте в картридже.

Торговое наименование лекарственного препарата: Ультракаин® Д-С форте.

Международное непатентованное или химическое наименование: Артикаин+Эпинефрин.

Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества): 1. Делфарм Дижон, 6 Boulevard de l'Europe, 21800 Quetigny, Франция. 2. Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Brueningstrasse 50, D-65926 Frankfurt (Main), Германия.

Регистрационное удостоверение №П N015117/01 дата регистрации 13.08.2008 г.

2. Ультракаин® Д-С в картридже.

Торговое наименование лекарственного препарата: Ультракаин® Д-С.

Международное непатентованное или химическое наименование: Артикаин+Эпинефрин.

Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества): 1. Делфарм Дижон, 6 Boulevard de l'Europe, 21800 Quetigny, Франция. 2. Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Brueningstrasse 50, D-65926 Frankfurt (Main), Germany, Германия..

Регистрационное удостоверение №П N015119/01 дата регистрации 13.08.2008 г.

3. Ультракаин® Д в картридже.

Торговое наименование лекарственного препарата: Ультракаин® Д.

Международное непатентованное или химическое наименование: Артикаин.

Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества): Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Brueningstrasse 50, D-65926 Frankfurt (Main), Germany, Германия.

Регистрационное удостоверение № ЛС-001358 дата регистрации 03.04.2011 г.

4. Убистезин форте в картридже

Торговое наименование лекарственного препарата: Убистезин форте

Международное непатентованное или химическое наименование: Артикаин+Эпинефрин.

Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества), 3М Дойчланд ГмбХ, 82229, Seefeld, ESPE Platz, Германия

Регистрационное удостоверение № ЛП-№(000846)-(ПГ-RU) дата регистрации 30.05.2022 г.

5. Убистезин в картридже

Торговое наименование лекарственного препарата: Убистезин

Международное непатентованное или химическое наименование: Артикаин+Эпинефрин.

Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества), 3М Дойчланд ГмбХ, 82229, Seefeld, ESPE Platz, Германия

Регистрационное удостоверение № ЛП-№(000850)-(ПГ-RU) дата регистрации 30.05.2022 г.

6. Септанест с адреналином 40 мг + 10 мкг/мл в картридже

Торговое наименование лекарственного препарата: Септанест с адреналином

Международное непатентованное или химическое наименование: ~

Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества), Септодонт, 58 Rue du Pont de Creteil, 94100, Saint-Maur-des-Fosses Cedex, Франция

Регистрационное удостоверение № П N012998/01 дата регистрации 09.07.2007 г.

7. Септанест с адреналином 40 мг + 5 мкг/мл в картридже
Торговое наименование лекарственного препарата: Септанест с адреналином
Международное непатентованное или химическое наименование: ~
Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества), Септодонт, 58 Rue du Pont de Creteil, 94100, Saint-Maur-des-Fosses Cedex, France, Франция
Регистрационное удостоверение № П N012998/01, дата регистрации 09.07.2007 г.
8. Скандонест в картридже
Торговое наименование лекарственного препарата: Скандонест
Международное непатентованное или химическое наименование: Мепивакаин
Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества), Септодонт, 58 Rue du Pont de Creteil, 94100, Saint-Maur-des-Fosses Cedex, France
Регистрационное удостоверение П N012996/01, дата регистрации 11.02.2008 г.
9. Артикаин Инибса 40 мг+0,01 мг/мл в картридже
Торговое наименование лекарственного препарата: Артикаин ИНИБСА
Международное непатентованное или химическое наименование: Артикаин+[Эпинефрин]
Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества), Лабораториос Инибса С.А., Ctra. Sabadell - Granollers, km 14.5, Llica de Vall, 08185 Barcelona, Spain
Регистрационное удостоверение № П N014371/01, дата регистрации 05.03.2009
10. Артикаин Инибса 40 мг+0,005 мг/мл в картридже
Торговое наименование лекарственного препарата: Артикаин ИНИБСА
Международное непатентованное или химическое наименование: Артикаин+[Эпинефрин]
Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества), Лабораториос Инибса С.А., Ctra. Sabadell - Granollers, km 14.5, Llica de Vall, 08185 Barcelona, Spain
Регистрационное удостоверение № П N014371/01, дата регистрации 05.03.2009
11. Скандинибса® в картридже
Торговое наименование лекарственного препарата: Скандинибса®
Международное непатентованное или химическое наименование: Мепивакаин
Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества), Лабораториос Инибса С.А., Ctra. Sabadell - Granollers, km 14.5, Llica de Vall, 08185 Barcelona, Spain
Регистрационное удостоверение № ЛСР-010989/09, дата регистрации 31.12.2009
12. Ораблок 40 мг/мл+10 мкг/мл в картридже
Торговое наименование лекарственного препарата: Ораблок
Международное непатентованное или химическое наименование: Артикаин+Эпинефрин
Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества), Перрель С.п.А., S.S. Appia - 81043 Capua (CE), Italy
Регистрационное удостоверение № ЛСР-004839/10, дата регистрации 27.05.2010
13. Ораблок 40мг/мл+5 мкг/мл в картридже
Торговое наименование лекарственного препарата: Ораблок
Международное непатентованное или химическое наименование: Артикаин+Эпинефрин
Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества), Перрель С.п.А., S.S. Appia - 81043 Capua (CE), Italy
Регистрационное удостоверение № ЛСР-004839/10, дата регистрации 27.05.2010

14. Артикаин с адреналином форте в картридже

Торговое наименование лекарственного препарата: Артикаин с адреналином форте

Международное непатентованное или химическое наименование: Артикаин+[Эпинефрин]

Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества), Федеральное казенное предприятие "Армавирская биологическая фабрика" (ФКП "Армавирская биофабрика") , 352212, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Мечникова, д. 11

Регистрационное удостоверение № ЛСП-008523/10, дата регистрации 23.08.2010

15. Артикаин с адреналином в картридже

Торговое наименование лекарственного препарата: Артикаин с адреналином

Международное непатентованное или химическое наименование: Артикаин+[Эпинефрин]

Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества), Федеральное казенное предприятие "Армавирская биологическая фабрика" (ФКП "Армавирская биофабрика") , 352212, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Мечникова, д. 11

Регистрационное удостоверение № ЛП-001943, дата регистрации 20.12.2012

16. Артикаин в картридже

Торговое наименование лекарственного препарата: Артикаин

Международное непатентованное или химическое наименование: Артикаин

Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества), Федеральное казенное предприятие "Армавирская биологическая фабрика" (ФКП "Армавирская биофабрика") , 352212, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Мечникова, д. 11

Регистрационное удостоверение № ЛСП-008522/10, дата регистрации 23.08.2010

17. Артикаин ИНИБСА 40 мг+0,01 мг/мл в картридже

Торговое наименование лекарственного препарата: Артикаин ИНИБСА

Международное непатентованное или химическое наименование: Артикаин ИНИБСА

Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества), Лабораториос Инибса С.А., Ctra. Sabadell - Granollers, km 14.5, Llica de Vall, 08185 Barcelona, Spain

Регистрационное удостоверение № П N014371/01, дата регистрации 05.03.2009

18. Артикаин ИНИБСА 40 мг+0,005 мг/мл в картридже

Торговое наименование лекарственного препарата: Артикаин ИНИБСА

Международное непатентованное или химическое наименование: Артикаин ИНИБСА

Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества), Лабораториос Инибса С.А., Ctra. Sabadell - Granollers, km 14.5, Llica de Vall, 08185 Barcelona, Spain

Регистрационное удостоверение № П N014371/01, дата регистрации 05.03.2009

19. Артикаин ДФ в картридже

Торговое наименование лекарственного препарата: Артикаин ДФ

Международное непатентованное или химическое наименование: Артикаин+[Эпинефрин]

Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества), ДФЛ Индустрия э Комерсио С.А., Estrada do Guerengue, 2059, CEP 22713-002, Rio de Janeiro, RJ, Brazil

Регистрационное удостоверение № ЛП-001074, дата регистрации 28.10.2011

20. Мепивакаин-Бинергия в картридже

Торговое наименование лекарственного препарата: Мепивакаин-Бинергия

Международное непатентованное или химическое наименование: Мепивакаин

Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества), Федеральное казенное предприятие «Армавирская биологическая фабрика» (ФКП «Армавирская биофабрика»), 352212, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Мечникова, д. 11
Регистрационное удостоверение № ЛП-005178, дата регистрации 19.11.2018

21. Артикаин-Бинергия с адреналином в картридже

Торговое наименование лекарственного препарата: Артикаин-Бинергия с адреналином

Международное непатентованное или химическое наименование: Артикаин+[Эпинефрин]

Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества), Федеральное казенное предприятие «Армавирская биологическая фабрика» (ФКП «Армавирская биофабрика»), 352212, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Прогресс, ул. Мечникова, д. 11

Регистрационное удостоверение № ЛП-004013, дата регистрации 08.12.2016

22. Примакаин с адреналином 40 мг+0,01 мг/мл в картридже

Торговое наименование лекарственного препарата: Примакаин с адреналином

Международное непатентованное или химическое наименование: Артикаин+[Эпинефрин]

Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества), Продуитс Дентаирес Пьер Ролланд, rue Joseph Cugnot - ZI du Phare, 33708 MERIGNAC cedex, Франция

Регистрационное удостоверение № П N011701/01, дата регистрации 08.09.2009

Информация о наличии конкретного ЛС в варианте исполнения Набора указана в Приложении 1 к Инструкции по применению.

8. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Применение набора для стоматологических хирургических процедур не воздействует на процесс взаимной обусловленности и связи медицинских изделий. В составе Набора II не поставляется игла. Для применения Набора II необходимо использовать следующие иглы:

- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г);
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г);
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г);
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г);
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GS, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г);
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г).

9. Частота и особенности использования медицинского изделия

Набор предназначен строго для одноразового применения.

Инъектор карпульный одноразовый входящий в состав набора является нестерильным медицинским изделием однократного применения. Стерилизации не подлежит.

10. Комплектность поставки

В комплект поставки входят набор I и (или) II, и (или) III, и (или) IV, и (или) V, и (или) VI, и (или) VII в вариантах исполнения, указанных в заявке в соответствии с Приложением 1, а также документы, удостоверяющие качество продукции и поставляемые в составе набора, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Комплектность документации

Документация	Обозначение	Количество, шт.
1 Этикетка	АМ. 65038901.000.001 ЭТ	1
2 Инструкция по применению	АМ. 65038901.000.001 ИМ	1
Примечание – Инструкция по применению поставляется в единственном экземпляре на заказанную партию наборов, с возможностью ксерокопирования (размножения документа).		

Каждый набор поставляется в герметичной индивидуальной потребительской таре. Упаковка набора в индивидуальную тару осуществляться в асептических условиях. Индивидуальная потребительская упаковка при заказе расфасовывается по 10, 20, 50, 100 или 200 шт. во внешнюю групповую упаковку: коробку из гофрированного картона.



Инструкция по применению, противопоказания и состав местноанестезирующего раствора от производителя прилагается к групповой упаковке!

11. Техническое описание медицинского изделия

Набор соответствует требованиям техническим условиям ТУ 32.50.13-002-65038901-2018 и комплекту документации согласно АМ. 65038901.000.001.

Инъектор из набора изготавливается из полипропилена по ГОСТ 26996-86, марки ПП Н030GP «Полиом».

Масса набора (в сборе) не превышает - 20 г.

Набор, упакованный в соответствии с требованиями ТУ 32.50.13-002-65038901-2018, при транспортировании устойчив к воздействию климатических факторов для условий хранения 1.2 по ГОСТ 15150-69, но для максимальной температуры не выше 25°C. Индивидуальная потребительская упаковка набора целостная и герметичная.

В составе набора (кроме Набора II) поставляется игла карпульная одноразовая для стоматологических вмешательств, имеющая типоразмеры в соответствии с Приложением 1 и разрешительные документы для применения в медицинской практике на территории Российской Федерации как медицинское изделие (МИ) и соответствующая ГОСТ ISO 7864. В составе Набора II не поставляется игла. Для применения Набора II необходимо использовать следующие иглы:

- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г);

- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г);

- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г);

- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г);

- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г);

- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г).

В составе набора применяется стерильный раствор для анестезии в карпуле, имеющий разрешительные документы для применения в медицинской практике на территории Российской Федерации как лекарственное средство (ЛС).

Максимальные размеры используемых карпул должны быть: длина 63,5 мм, наружный диаметр 8,8 мм и номинальная вместимость не более 1,8 мл.

Инъектор карпульный, входящий в состав набора, представляет собой цилиндрический корпус, в полость которого вводится сменная карпула с инъекционным препаратом, на одном торце корпуса имеется сквозной осевой канал для вхождения в полость корпуса части обоюдоострой иглы, которая предназначена для прокалывания карпулы. На другом торце цилиндрического корпуса имеется крышка с осевым отверстием. Через это отверстие проходит шток, на одном конце, которого имеется наконечник для надавливания на поршень карпулы, а на другом рукоятка.

Цилиндр инъектора снабжен упорами для пальцев, обеспечивающими фиксацию инъектора в руке и предотвращение его скатывания на плоскости с углом наклона к горизонтали $10 \pm 1^\circ$. Упоры обеспечивают надежное удерживание инъектора при его применении за счет соответствующих размеров, формы и прочности. Инъектор обеспечивает надежное удержание карпулы с лекарственным средством.

Конструкция штока инъектора и упора на нем предусмотрена таким образом, чтобы при удержании одной рукой шток мог быть утоплен большим пальцем этой же руки.

Шток инъектора выпускается в двух исполнениях (в соответствии с рисунком 1):

- с градуированной шкалой;
- без градуированной шкалы.
- с градуированной шкалой и с подвижными выступами для блокировки обратного хода штока;
- без градуированной шкалы и с подвижными выступами для блокировки обратного хода штока.

Шкала штока шприца (с градуированной шкалой) должна быть градуирована делениями. Деление шкалы: от 0,3 мл до 1,5 мл. Вместимость между линиями градуировки с числами: 0,3 мл.

Вариант исполнения штока поршня инъектора с подвижными выступами для блокировки обратного хода должен препятствовать обратному движению штока инъектора и таким образом обеспечивать однократность применения изделия.

Величина максимального инъекционного усилия, необходимого для начала перемещения штока инъектора, $F_{\max}$ – не превышает 25Н (2,5 кг•с).

Конструкция инъектора предусматривает наличие выдвижного защитного цилиндра, установленного на основном цилиндре, так же инъектор выпускается и без выдвижного защитного колпачка

Защитный цилиндр свободно выдвигается на всю и более длину иглы с блокировкой и фиксацией в конце движения. После фиксации невозможно дальнейшее движение защитного цилиндра в любую сторону (Требование только для инъектора с выдвижным защитным колпачком).

Основной и защитный цилиндры инъектора прозрачные, в целях возможности видеть характеристики ЛС в карпуле (наименование и шкалу) невооруженным глазом.

Допускается цветовая индикация задней заглушки инъектора, цилиндра инъектора, защитного колпачка инъектора и корпуса инъектора в целях уменьшения психоэмоционального состояния пациента (для детской стоматологии). Таблица цветовой индикации изделия представлена в приложении 2 с возможностью быстро выбрать нужный тип, в зависимости от анестетика.

При цветовой индикации корпус инъектора всегда остается прозрачным.

Игла карпульная одноразовая для стоматологических вмешательств, применяемая в комплекте, обеспечивает прочность и устойчивость соединения с инъектором. Герметичность разъемного соединения иглы и инъектора обеспечивается за счет использования винтового соединения типа «Луер».

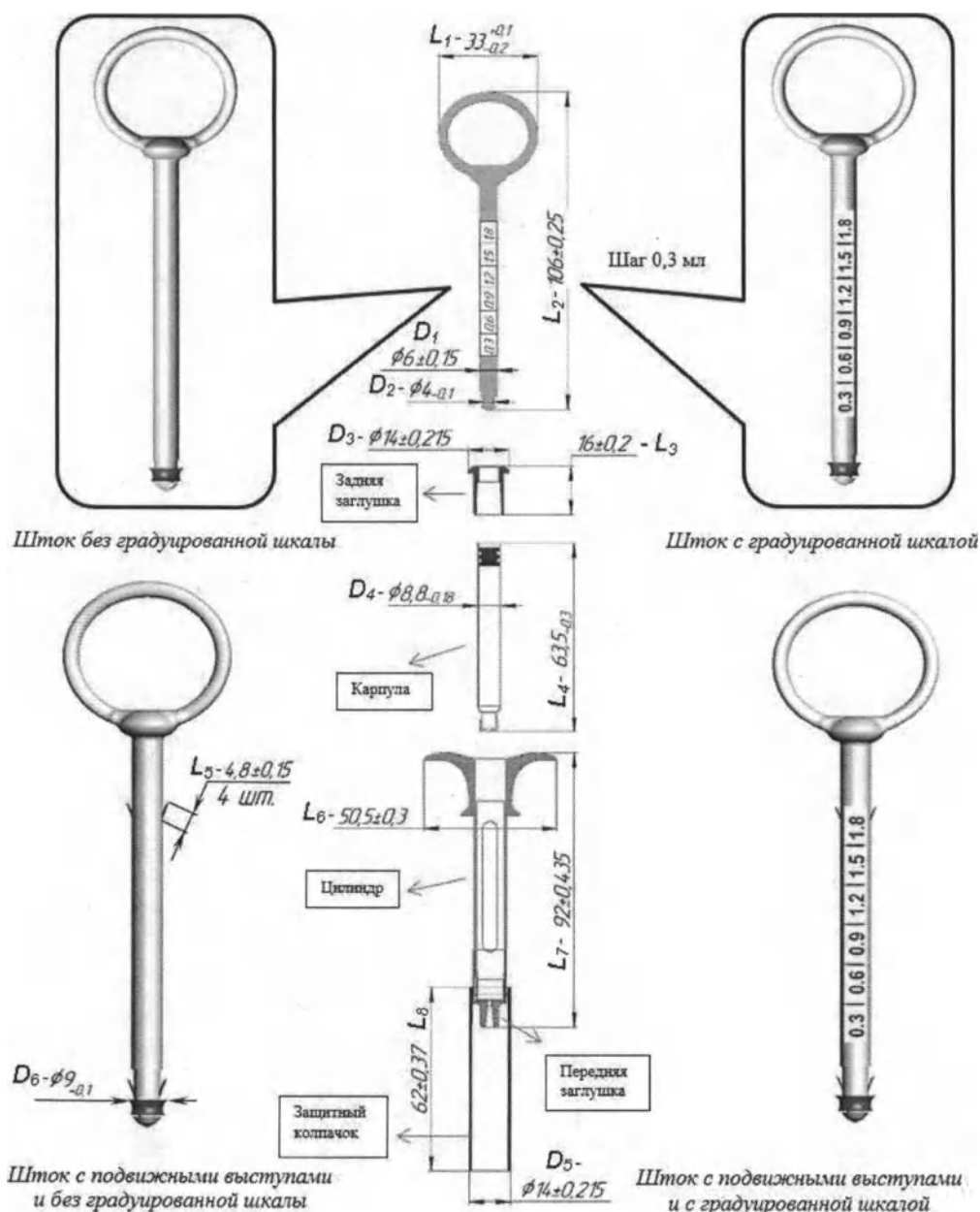


Рисунок 1 Форма и размеры инъектора и карпулы (картриджа)

12. Порядок работы с медицинским изделием, требования к применению и эксплуатации медицинского изделия

Перед применением необходимо тщательно осмотреть набор. Убедиться в целостности упаковки на наличие повреждений (вскрытия), сроке годности набора, в отсутствии повреждений комплектующих набора (инъектора, иглы, карпулы). В противном случае набор подлежит утилизации.

Упаковка вскрывается с одной из сторон. Извлекается инъектор и игла (для набора I). Устанавливается (накручиванием) инъекционная игла на резьбовую часть инъектора.

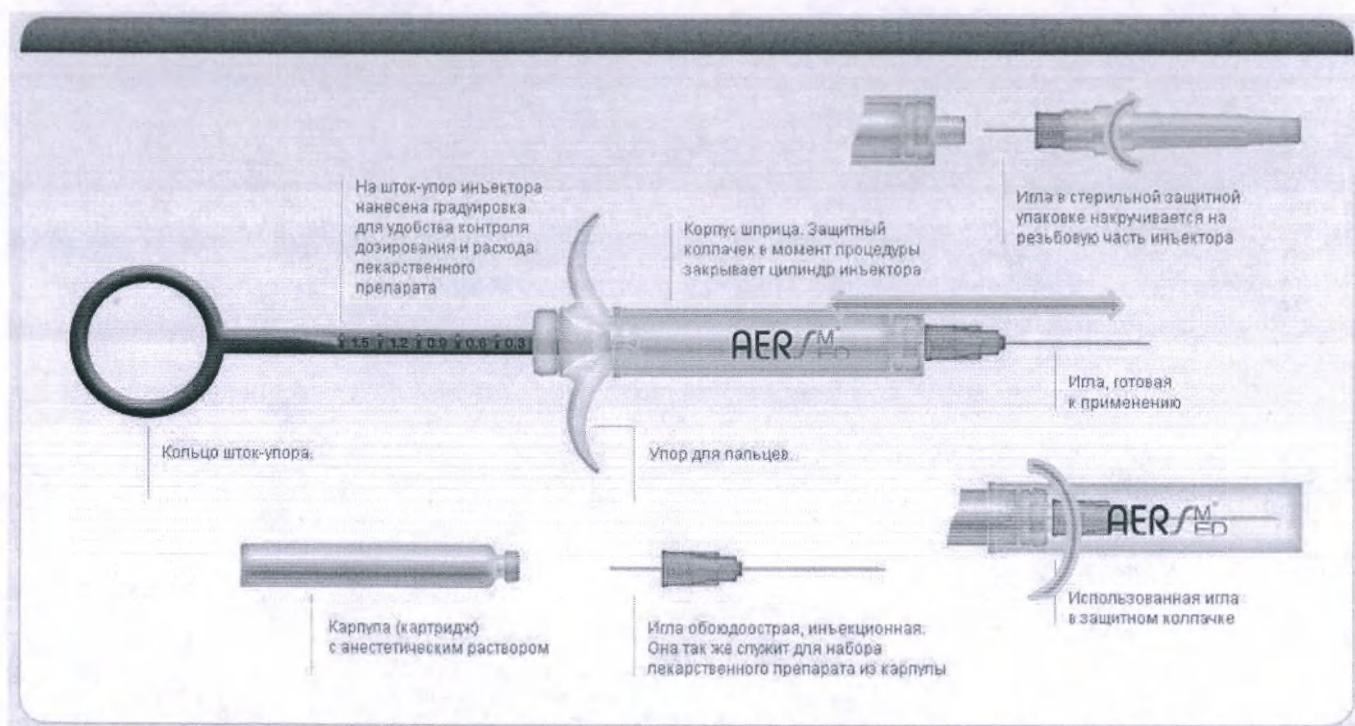


Рисунок 2 – Составные части набора

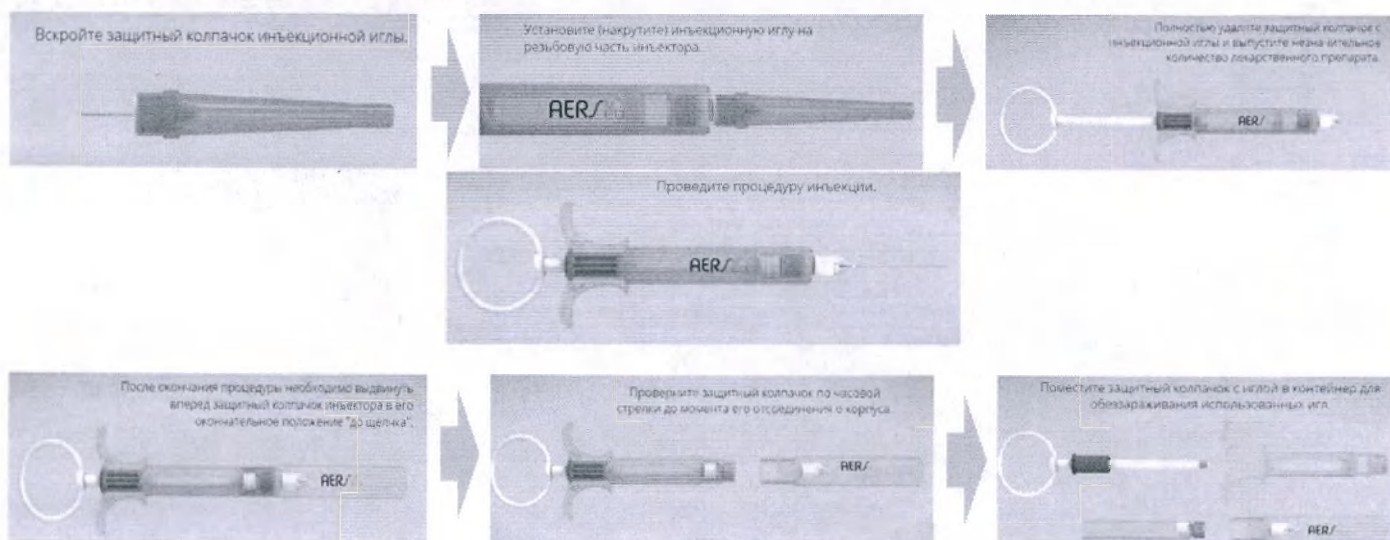


Рисунок 3 – Порядок проведения процедуры

Непосредственно перед применением, полностью удаляется защитный колпачок с инъекционной иглы и выпускается незначительное количество лекарственного препарата путем надавливания на шток инъектора.

После окончания процедуры инъекции:

- для инъектора с выдвижным защитным колпачком, необходимо выдвинуть вперед защитный колпачок инъектора в его окончательное положение (до щелчка) и повернуть защитный колпачок по часовой стрелке до момента его отсоединения от корпуса (при необходимости).

- для инъектора без выдвижного защитного колпачка, необходимо для отделения игл от инъектора использовать иглосъемники, иглодеструкторы, иглоотсекатели.

После окончания всех манипуляций с инъектором необходимо поместить инъектор и защитный колпачок с иглой в контейнер для использованных шприцов и игл для последующего обеззараживания и утилизации.

Для применения Набора II необходимо использовать иглу карпульную одноразовую для стоматологических вмешательств (не поставляется в составе набора), имеющую типоразмеры в соответствии с Приложением I и разрешительные документы для применения в медицинской практике на территории Российской Федерации как медицинское изделие (МИ) и соответствующая ГОСТ ISO 7864, И провести все действия указанные в п. 12.

13. Условия применения медицинского изделия

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения может применяться в ЛПУ стоматологического профиля квалифицированным медицинским персоналом.

14. Условия эксплуатации

Набор предназначен строго для одноразового применения.

15. Срок службы (годности) и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока службы (годности)

Изготовитель (Поставщик) гарантирует соответствие набора требованиям ТУ 32.50.13-002-65038901-2018 при соблюдении условий применения, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения набора - 3 года с даты упаковывания, но не более срока хранения, применяемого в наборе лекарственного средства»

Внимание! Не применять после истечения срока годности указанного на упаковке!

Изделие подлежит утилизации!

16. Условия хранения

Набор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться на складах поставщика в условиях закрытого склада, помещения, при температуре от 5 до 25°C и относительной влажности воздуха не выше 80 %, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в течении 3 лет с даты упаковывания, но не более срока хранения применяемого в наборе лекарственного средства.

При хранении наборы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

17. Транспортирование

Транспортировка упакованных наборов осуществляется любым видом транспорта, при условии защиты их от механических воздействий, атмосферных осадков и действий агрессивных сред, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование при минимальной температуре окружающей среды не ниже 5°C до максимальной плюс 25°C.

18. Утилизация и уничтожение

Наборы для стоматологических хирургических процедур, содержащие лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018, имеющие

повреждения индивидуальной упаковки, либо истекший срок годности использовать не допускается, их следует утилизировать.

Примечание - Утилизация данных медицинских изделий осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21, как отходы класса А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам.

После применения набора процесс утилизации одноразовых медицинских изделий, относящихся к опасным медицинским отходам класса Б, является одинаковым как для карпульных шприцев, так и одноразовых инъекционных игл и проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противо-эпидемических (профилактических) мероприятий".

19. Маркировка

Маркировка (этикетка) индивидуальной потребительской тары содержит:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
- наименование или обозначение набора;
- комплектность (с описанием содержимого набора);
- сведения о наличии градуировки на штоке шприца;
- сведения о наличии защитного колпачка цилиндра шприца;
- сведения о наличии подвижных выступов для блокировки обратного хода на штоке поршня инъектора;
- символ «Запрет на повторное применение»;
- надпись: «Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апиrogenны, нетоксичны»;
- сведения о недопустимости применения в случае нарушения целостности потребительской тары;
- год и месяц упаковывания;
- условия хранения;
- номер партии;
- гарантийный срок годности или слова «годен до ...» (месяц и две последние цифры года), или соответствующего символа;
- номер и дата регистрационного удостоверения Росздравнадзора;
- обозначение настоящих ТУ;
- предупреждение «Не использовать по истечению срока годности! Применять по рецепту!»;
- символ температурный диапазон при хранении и транспортировании;
- знак соответствия СМК ГОСТ ISO 13485;
- знак соответствия по ГОСТ Р 50460;
- символ о необходимости выбросить упаковку в урну;
- штрих-код.

Обозначения символов приведены в таблице:

Символ	Расшифровка
	Запрет на повторное применение
	Температурный диапазон
	Упаковку следует выбросить в урну.
	знак соответствия по ГОСТ Р 50460

Внешняя групповая упаковка (коробка) имеет маркировку:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
- наименование или обозначение набора;
- комплектность с указанием количества наборов (с описанием содержимого наборов, при необходимости);
- сведения об однократности применения;
- надпись: «Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апиrogenны, нетоксичны»;
- сведения о недопустимости применения в случае нарушения целостности потребительской тары (при необходимости);
- год и месяц упаковывания;
- номер партии;
- обозначение настоящих ТУ.
- символ «Температурный диапазон» при хранении и транспортировании.

Транспортная маркировка выполнена по ГОСТ 14192. На транспортную тару должна быть нанесена маркировка:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
- наименование или обозначение набора;
- количество внешних групповых упаковок (коробок) в транспортной таре;
- год и месяц упаковывания.

20. Гарантийные обязательства

Компания гарантирует качество, безопасность и эффективность изделия, если оно используется в соответствии с инструкцией по применению до истечения срока годности и хранится с соблюдением условий хранения.

21. Требования по техническому обслуживанию медицинского изделия

Изделие только для одноразового применения, техническое обслуживание не применимо.

22. Рекламация

В случае возникновения жалоб, пожалуйста, обращайтесь по адресам:

Общество с ограниченной ответственностью «АЭРС-МЕД» (ООО «АЭРС-МЕД»).

Россия, 170001, г. Тверь, Территория Двор Пролетарки, 10 А, оф. 203

Тел./факс: +7 (495) 973-77-35/979-67-15.

Адрес электронной почты: aers@shpric.com

<http://shpric.com/contacts>

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

I. Набор I:

1. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения I.I, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ультракаин[®] Д-С форте – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

2. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения I.II, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ультракаин[®] Д-С в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

3. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения I.III, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ультракаин[®] Д в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

4. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения I.IV, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- убистезин-форте в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

5. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения I.V, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- убистезин в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

6. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения I.VI, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - септанест с адреналином 40 мг + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
 - игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
7. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения I.VII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - септанест с адреналином 40 мг + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
 - игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
8. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения I.VIII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - скандонест в картридже – 1 шт.;
 - игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
9. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения I.IX, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт.;
 - игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
10. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения I.X, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт.;
 - игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
11. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения I.XI, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - скандинибса[®] в картридже – 1 шт.;
 - игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
12. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения I.XII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

13. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения I.XIII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

14. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения I.XIV, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый - 1 шт.;
- артикаин с адреналином форте в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

15. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения I.XV, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин с адреналином в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

16. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения I.XVI, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

17. Набор «ARTIJECT[®]», вариант исполнения I. XVII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

18. Набор «ARTIJECT[®]», вариант исполнения I.XVIII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт.;

- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

19. Набор «ARTIJECT[®]», вариант исполнения I.XIX, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- скандинибса[®] в картридже – 1 шт.;

- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

20. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения I.XX, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- артикаин ДФ в картридже – 1 шт.;

- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

21. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения I.XXI, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- мепивакаин-бинергия в картридже – 1 шт.;

- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

22. Набор, вариант исполнения I.XXII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- артикаин-бинергия с адреналином в картридже – 1 шт.;

- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмеры 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 40мм. РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

II. Набор II:

1. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения II.I, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- ультракаин[®] Д-С форте в картридже – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

2. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения II.II, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- ультракаин[®] Д-С в картридже – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

3. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения II.III, в составе:
 - инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - ультракаин[®] Д в картридже – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
4. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения II.IV, в составе:
 - инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - убистезин-форте в картридже – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
5. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения II.V, в составе:
 - инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - убистезин в картридже – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
6. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения II.VI, в составе:
 - инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - септанест с адреналином 40 мг + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
7. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения II.VII, в составе:
 - инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - септанест с адреналином 40 мг + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
8. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения II.VIII, в составе:
 - инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - скандонест в картридже – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
9. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения II.IX, в составе:
 - инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
10. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения II.X в составе:
 - инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
11. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения II.XI в составе:
 - инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - скандинибса[®] в картридже – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
12. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения II.XII, в составе:
 - инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.;

- этикетка;
 - инструкция по применению.
13. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения II.XIII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
 - ораблук 40 мг/мл + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
14. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения II.XIV, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
 - артикаин с адреналином форте в картридже – 1 шт;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
15. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения II.XV, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
 - артикаин с адреналином в картридже – 1 шт;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
16. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения II.XVI, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
 - артикаин в картридже – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
17. Набор «ARTJECT[®]», вариант исполнения II.XVII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
 - артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
18. Набор «ARTJECT[®]», вариант исполнения II.XVIII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
 - артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
19. Набор «ARTJECT[®]», вариант исполнения II.XIX, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
 - скандинибса[®] в картридже – 1 шт;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
20. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения II. XX, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
 - примакаин с адреналином 40 мг+0,01 мг/мл в картридже – 1 шт;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
21. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения II.XXI, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - артикаин ДФ в картридже – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
22. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения II.XXII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- мепивакаин-бинергия в картридже – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

23. Набор, вариант исполнения II.XXIII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин-бинергия с адреналином в картридже – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

III. Набор III:

1. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения III.I, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ультракаин[®] Д-С форте в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

2. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения III.II, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ультракаин[®] Д-С в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

3. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения III.III, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ультракаин[®] Д в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

4. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения III.IV, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- убистезин-форте в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

5. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения III.V, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- убистезин в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;

- этикетка;
 - инструкция по применению.
6. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения III.VI, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - септанест с адреналином 40 мг + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
 - игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
7. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения III.VII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - септанест с адреналином 40 мг + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
 - игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
8. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения III.VIII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - скандонест в картридже – 1 шт.;
 - игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
9. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения III.IX, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт.;
 - игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт;
 - этикетка; - инструкция по применению.
10. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения III.X, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт.;
 - игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
11. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения III.XI, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - скандинибса[®] в картридже – 1 шт.;
 - игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.

12. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения III.XII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

13. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения III.XIII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

14. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения III.XIV, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин с адреналином форте в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

15. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения III.XV, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин с адреналином в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

16. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения III.XVI, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

17. Набор «ARTIJECT[®]», вариант исполнения III.XVII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;
- этикетка; - инструкция по применению.

18. Набор «ARTIJECT[®]», вариант исполнения III.XVIII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт;

- этикетка;

- инструкция по применению.

19. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения III.XIX, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- скандинибса® в картридже – 1 шт.;

- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт;

- этикетка;

- инструкция по применению.

20. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XX, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- примакан с адреналином 40 мг+0,01 мг/мл в картридже – 1 шт.;

- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт;

- этикетка;

- инструкция по применению.

21. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XXI, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- мепивакаин-бинергия в картридже – 1 шт.;

- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт;

- этикетка;

- инструкция по применению.

22. Набор, вариант исполнения III.XXII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- артикаин-бинергия с адреналином в картридже – 1 шт.;

- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмеры: 30G x 12мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 41мм. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт;

- этикетка;

- инструкция по применению

IV. Набор IV:

1. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.I, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- ультракаин® Д-С форте в картридже – 1 шт.;

- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

2. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения IV.II, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ультракаин[®] Д-С в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

3. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения IV.III, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ультракаин[®] Д в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

4. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения IV.IV, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- убистезин-форте в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

5. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения IV.V, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- убистезин в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

6. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения IV.VI, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- септанест с адреналином 40 мг + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

7. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения IV.VII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- септанест с адреналином 40 мг + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения:

SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм;
SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) –
1 шт.;

- этикетка;
- инструкция по применению.

8. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения IV.VIII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- скандонест в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

9. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения IV.IX, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;
- этикетка; - инструкция по применению.

10. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения IV.X, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

11. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения IV.XI, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- скандинибса[®] в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

12. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения IV.XII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ораблос 40 мг/мл + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

13. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения IV.XIII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ораблук 40 мг/мл + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

14. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения IV.XIV, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин с адреналином форте в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

15. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения IV.XV, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин с адреналином в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

16. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения IV.XVI, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

17. Набор «ARTIJECT[®]», вариант исполнения IV.XVII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;
- этикетка; - инструкция по применению.

18. Набор «ARTIJECT[®]», вариант исполнения IV.XVIII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм;

SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;

- этикетка;
- инструкция по применению.

19. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения IV.XIX, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- скандинибса® в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;

- этикетка;
- инструкция по применению.

20. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV. XX, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- примакан с адреналином 40 мг+0,01 мг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;

- этикетка;
- инструкция по применению.

21. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV. XXI, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- мепивакаин-бинергия в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;

- этикетка;
- инструкция по применению.

22. Набор, вариант исполнения IV. XXII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин-бинергия с адреналином в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (варианты исполнения: SEPTOJECT 30G 0,30 x 16 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 21 мм; SEPTOJECT 30G 0,30 x 25 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 35 мм; SEPTOJECT 27G 0,40 x 42 мм. РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;

- этикетка;
- инструкция по применению.

V. Набор V:

1. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.I, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ультракаин® Д-С форте в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;

- этикетка;
 - инструкция по применению.
2. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения V.II, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - ультракаин[®] Д-С в картридже – 1 шт.;
 - игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
3. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения V.III, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - ультракаин[®] Д в картридже – 1 шт.;
 - игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
4. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения V.IV, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - убистезин-форте в картридже – 1 шт.;
 - игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
5. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения V.V, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - убистезин в картридже – 1 шт.;
 - игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
6. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения V.VI, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - септанест с адреналином 40 мг + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
 - игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
7. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения V.VII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - септанест с адреналином 40 мг + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
 - игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
8. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения V.VIII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - скандонест в картридже – 1 шт.;
 - игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

9. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения V.IX, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт.;

- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

10. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения V.X, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт.;

- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

11. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения V.XI, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- скандинибса[®] в картридже – 1 шт.;

- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

12. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения V.XII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- ораблос 40 мг/мл + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.;

- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

13. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения V.XIII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- ораблос 40 мг/мл + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.;

- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

14. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения V.XIV, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- артикаин с адреналином форте в картридже – 1 шт.;

- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

15. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения V.XV, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- артикаин с адреналином в картридже – 1 шт.;

- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;

- этикетка;
 - инструкция по применению.
16. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения V.XVI, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - артикаин в картридже – 1 шт.;
 - игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
17. Набор «ARTIJECT[®]», вариант исполнения V.XVII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт.;
 - игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
18. Набор «ARTIJECT[®]», вариант исполнения V.XVIII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт.;
 - игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
19. Набор «ARTIJECT[®]», вариант исполнения V.XIX, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - скандинибса[®] в картридже – 1 шт.;
 - игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
20. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения V.XX, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - артикаин ДФ в картридже – 1 шт.;
 - игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
21. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения V.XXI, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - мепивакаин-бинергия в картридже – 1 шт.;
 - игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
22. Набор, вариант исполнения V.XXII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - артикаин-бинергия с адреналином в картридже – 1 шт.;
 - игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмеры: 30G x12 мм; 30G x 16 мм; 30G x 25 мм; 27G x 36 мм. РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;

- этикетка;
- инструкция по применению.

VI. Набор VI:

1. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VI.I, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин[®] Д-С форте в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

2. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VI.II, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ультракаин[®] Д-С в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

3. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VI.III, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ультракаин[®] Д в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

4. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VI.IV, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- убистезин-форте в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

5. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VI.V, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- убистезин в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

6. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VI.VI, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- септанест с адреналином 40 мг + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

7. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VI.VII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- септанест с адреналином 40 мг + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

8. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VI.VIII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- скандонест в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

9. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VI.IX, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

10. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VI.X, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;
- этикетка;
- инструкция по применению.

11. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VI.XI, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- скандинибса[®] в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC,

размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. ПУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

12. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VI.XII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.;

- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. ПУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

13. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VI.XIII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.;

- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. ПУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

14. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VI.XIV, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- артикаин с адреналином форте в картридже – 1 шт.;

- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. ПУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

15. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VI.XV, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- артикаин с адреналином в картридже – 1 шт.;

- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. ПУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

16. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VI.XVI, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- артикаин в картридже – 1 шт.;

- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. ПУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

17. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения VI. XVII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт.;

- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

18. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения VI. XVIII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт.;

- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

19. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения VI. XIX, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- скандинибса® в картридже – 1 шт.;

- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

20. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI. XX, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- артикаин ДФ в картридже – 1 шт.;

- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

21. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI. XXI, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- мепивакаин-бинергия в картридже – 1 шт.;

- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

22. Набор, вариант исполнения VI. XXII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- артикаин-бинергия с адреналином в картридже – 1 шт.;

- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (30GC, размером (0,3 x 12) мм; 30GM, размером (0,3 x 16) мм; 30GS, размером (0,3 x 21) мм; 30GL, размером (0,3 x 25) мм; 27GS, размером (0,4 x 21) мм; 27GL, размером (0,4 x 30) мм. РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

VII. Набор VII:

1. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. I, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;

- ультракаин® Д-С форте в картридже – 1 шт;

- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

2. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. II, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- ультракаин® Д-С в картридже – 1 шт.;

- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

3. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. III, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- ультракаин® Д в картридже – 1 шт.;

- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

4. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. IV, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- убистезин-форте в картридже – 1 шт.;

- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

5. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. V, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- убистезин в картридже – 1 шт.;

- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

6. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. VI, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - септанест с адреналином 40 мг + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
 - игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
7. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VII. VII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - септанест с адреналином 40 мг + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
 - игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
8. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VII. VIII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - скандонест в картридже – 1 шт.;
 - игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
9. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VII. IX, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт.;
 - игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
10. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VII. X, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт.;
 - игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
11. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VII. XI, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - скандинибса[®] в картридже – 1 шт.;
 - игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
12. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VII. XII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
 - игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
13. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VII. XIII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
 - игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
14. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VII. XIV, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - артикаин с адреналином форте в картридже – 1 шт.;
 - игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
15. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VII. XV, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - артикаин с адреналином в картридже – 1 шт.;
 - игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
16. Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения VII. XVI, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - артикаин в картридже – 1 шт.;
 - игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
17. Набор «ARTIJECT[®]», вариант исполнения VII. XVII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт.;
 - игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;
 - этикетка;
 - инструкция по применению.
18. Набор «ARTIJECT[®]», вариант исполнения VII. XVIII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт.;

- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

19. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения VII. XIX, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- скандинибса® в картридже – 1 шт.;

- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

20. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. XX, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- артикаин ДФ в картридже – 1 шт.;

- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

21. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. XXI, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- мепивакаин-бинергия в картридже – 1 шт.;

- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

22. Набор, вариант исполнения VII. XXII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;

- артикаин-бинергия с адреналином в картридже – 1 шт.;

- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмеры: 30G x 12 мм; 30G x 16мм; 30G x 21мм; 30G x 25мм; 30G x 30мм; 30G x 38мм; 27G x 30мм; 27G x 35мм; 27G x 38мм. РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;

- этикетка;

- инструкция по применению.

ЦВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ ИНЪЕКТОРА ДЛЯ НАБОРОВ (СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ)

Номер набора	Цвет корпуса инъектора, цвет задней заглушки инъектора
I.IV; II.IV; III.IV; IV.IV; V.IV; VI.IV; VII.IV; I.VI; II.VI; III.VI; IV.VI; V.VI; VI.VI; VII.VI; I.X; II.X; III.X; IV.X; V.X; VI.X; VII.X; I.XVIII; II.XVIII; III.XVIII; IV.XVIII; V.XVIII; VI.XVIII; VII.XVIII; I.XVI; II.XVI; III.XVI; IV.XVI; V.XVI; VI.XVI; VII.XVI.	Желтый
I.V; II.V; III.V; IV.V; V.V; VI.V; VII.V; I.XIV; II.XIV; III.XIV; IV.XIV; V.XIV; VI.XIV; VII.XIV; I.XVII; II.XVII; III.XVII; IV.XVII; V.XVII; VI.XVII; VII.XVII; I.IX; II.IX; III.IX; IV.IX; V.IX; VI.IX; VII.IX; I.XX; II.XXI; V.XX; VI.XX; VII.XX.	Красный
I.II; II.II; III.II; IV.II; V.II; VI.II; VII.II; I.VII; II.VII; III.VII; IV.VII; V.VII; VI.VII; VII.VII; I.VIII; II.VIII; III.VIII; IV.VIII; V.VIII; VI.VIII; VII.VIII; I.XV; II.XV; III.XV; IV.XV; V.XV; VI.XV; VII.XV; I.XXI; III.XXI; IV.XXI; V.XXI; VI.XXI; VII.XXI; I.XXII; II.XXII; II.XXIII; V.XXII; VI.XXII; VII.XXII.	Зеленый
I.I; II.I; III.I; IV.I; V.I; VI.I; VII.I; I.III; II.III; III.III; IV.III; V.III; VI.III; VII.III; I.XI; II.XI; III.XI; IV.XI; V.XI; VI.XI; VII.XI; I.XII; II.XII; III.XII; IV.XII; V.XII; VI.XII; VII.XII; I.XIII; II.XIII; III.XIII; IV.XIII; V.XIII; VI.XIII; VII.XIII; I.XIX; II.XIX; III.XIX; IV.XIX; V.XIX; VI.XIX; VII.XIX; II.XX; II.XXIV; III.XX; III.XXII; IV.XX; IV.XXII; I.XXIII; V.XXIII; VI.XXIII; VII.XXIII.	Синий
Примечание – прозрачный цвет корпуса инъектора (неокрашенный) может выпускаться для всех вариантов исполнения наборов.	

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 44 (Срок души) лист(а/ов)

Генеральный директор
ООО «АЭРС-МЕД»

А. А. Абовян

