

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия

**Набор для мониторинга кровяного давления
SKY Medical одноразовый, стерильный с
принадлежностями**

Набор для мониторинга давления SKY Medical с датчиком с краном с красной ручкой, арт. BP-S00001

Набор
закрыт
арт. 8

В СОСТАВЕ:

Линия инфузии с клапаном-капельницей, длина 180 см – 1 шт., в составе: камера-капельница с колпачком – 1 шт., трубка – 1 шт., розеточный зажим – 1 шт., лuer-коннектор M – 1 шт.
Датчик давления, одноразовый, 3 мл/ч, с краном с красной ручкой – 1 шт., в составе: соединительная линия, длина 125 см – 1 шт., в составе: трубка – 1 шт., лuer-коннектор M – 1 шт., лuer-коннектор F – 1 шт.
Кран 4-х клапанов с красной ручкой – 1 шт., в составе: трубка – 1 шт., лuer-коннектор M – 1 шт., лuer-коннектор F – 1 шт., колпачок – 1 шт.
Кабель к процессору обработки сигналов – 1 шт.
Выключатель с пьезоэлектрическим датчиком – 1 шт.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Органайзер DPT с двумя пластинами, арт. DO-10001 – 1 шт. (при необходимости).

Органайзер DPT с тремя пластинами, арт. DO-10003 – 1 шт. (при необходимости).

Крепёжное устройство для органайзера, арт. DO-10000 – 1 шт. (при необходимости).

ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: см. на обороте

Использованные изделия обеззараживаются и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б). Неиспользованные изделия утилизировать как отходы класса А.

Назначение:
для непрямого инвазивного контроля давления с помощью встроенных датчиков давления.

Меры предосторожности:
Не используйте изделия по истечении срока годности

Хранить:
в оригинальных закрытых упаковках производителя в месте, защищенном от влаги, прямых солнечных лучей при температуре 5 - 35 °С, влажности не более 80%.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам полного обращения медицинских изделий: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ» (ООО «ИМС»), Адрес: 119042, Москва, ул. Малый Могильцевский переулок, дом 45, этаж 1, офис 3, т. +7(495) 505-646, veronikdrg@yandex.ru

REF

ПУ №

ОТ

CE 1936

SKY Medical, a.s. (СКАЙ Медикал а.с.), Адрес: Viesňavy, 24/2058, Samorin, 931 01, Slovenská republika (Винчензи, 24/2058, Шаморин, 931 01, Словацкая республика), т. +421312851700, info@med-sky.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам полного обращения медицинских изделий: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ» (ООО «ИМС»), Адрес: 119042, Москва, ул. Малый Могильцевский переулок, дом 45, этаж 1, офис 3, т. +7(495) 505-646, veronikdrg@yandex.ru

Крепёжное устройство для органайзера

1 шт.

LOT

DO-10000


REF

2020-06

CE 1936

SKY Medical, a.s. (СКАЙ Медикал а.с.), Адрес: Viesňavy, 24/2058, Samorin, 931 01, Slovenská republika (Винчензи, 24/2058, Шаморин, 931 01, Словацкая республика), т. +421312851700, info@med-sky.com

Внешний вид набора для мониторинга кровяного давления SKY Medical одноразового, стерильного с принадлежностями во вторичной потребительской упаковке

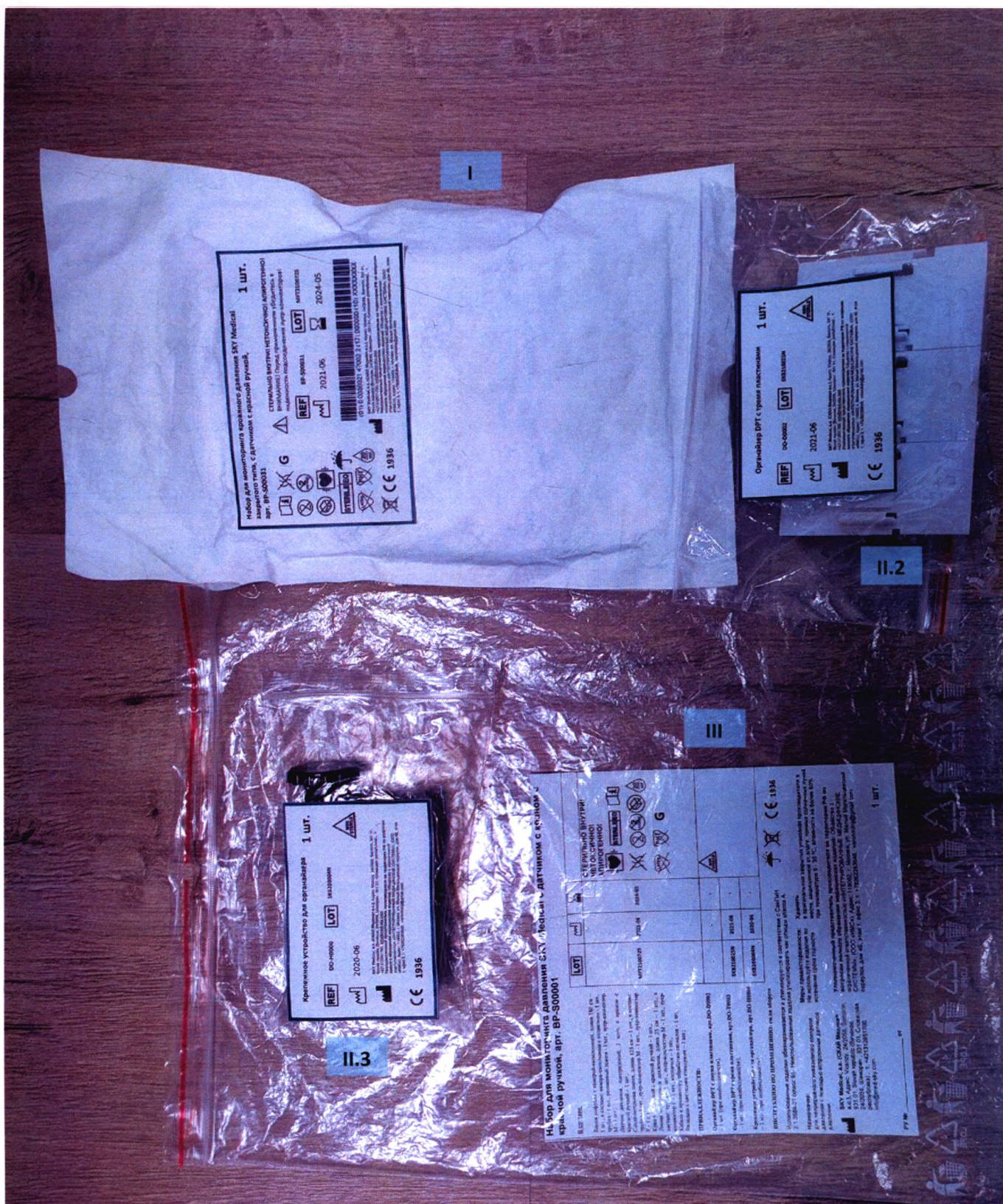


Внешний вид Набора для мониторинга кровяного давления SKY Medical одноразового, стерильного с принадлежностями,

- I. Набор для мониторинга кровяного давления SKY Medical (в вариантах исполнения), первичная стерилизационная упаковка
- II. Принадлежности:
 1. Органайзер DPT с двумя пластинами, арт.DO-D0002 – 1 шт. (нет в данном наборе)
 2. Органайзер DPT или с тремя пластинами, арт.DO-T0003 – 1 шт.
 3. Крепежное устройство для органайзера, арт.DO-H0000 – 1 шт.;
- III. Инструкция по применению
(с обратной стороны этикетки вторичной упаковки)




1. Набор для мониторинга давления SKY Medical с датчиком с краном с красной ручкой, арт. BP-S00001, в составе:

- 1.1. Линия инфузии с камерой-капельницей, длина 180 см - 1 шт., в составе: камера-капельница с колпачком - 1 шт., трубка - 1 шт., роликовый зажим - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт.
- 1.2. Датчик давления, одноразовый, 3 мл/ч, с краном с красной ручкой - 1 шт.,
- 1.3. Соединительная линия, длина 125 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт.
- 1.4. Кран 4-х ходовой с красной ручкой - 1 шт.
- 1.5. Линия мониторинга давления, длина 25 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт., колпачок - 1 шт.
- 1.6. Кабель к процессору обработки сигналов - 1 шт.
- 1.7. Вкладыш с цветными стикерами - 1 шт.

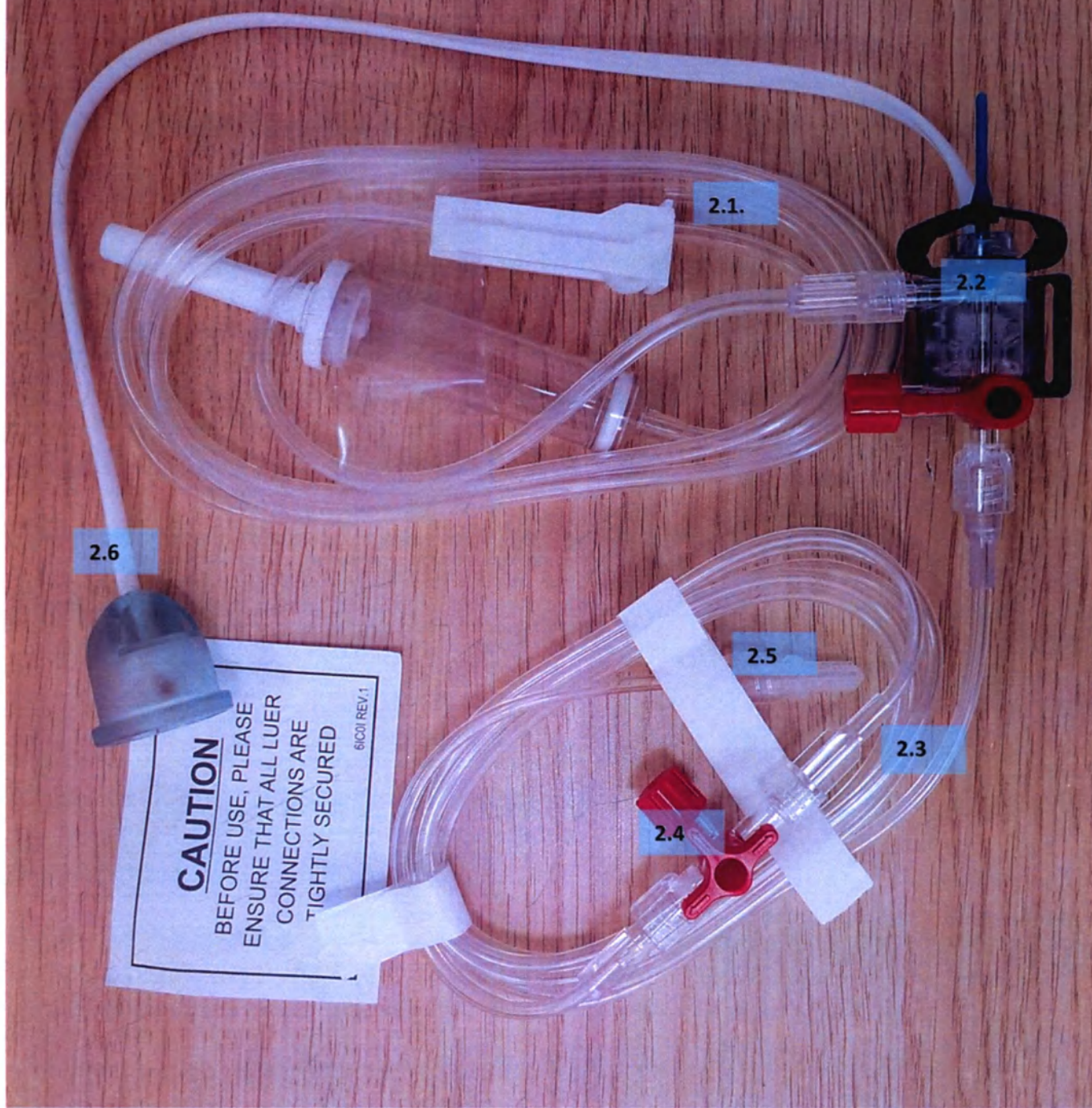


2. Набор для мониторинга давления SKY Medical с датчиком с краном с красной ручкой, арт. ВР-S00002, в составе:

- 2.1. Линия инфузии с камерой-капельницей, длина 180 см-1 шт., в составе: камера-капельница с колпачком - 1 шт., трубка- 1 шт., роликовый зажим- 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт.
- 2.2. Датчик давления, одноразовый, 3 мл/ч, с краном с красной ручкой - 1 шт.
- 2.3. Соединительная линия, длина 180 см -1 шт., в составе: трубка-1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт.
- 2.4. Кран 4-х ходовой с красной ручкой - 1 шт.
- 2.5. Линия мониторинга давления, длина 30 см - 1 шт., в составе: трубка- 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт., колпачок - 1 шт.
- 2.6. Кабель к процессору обработки сигналов - 1 шт.

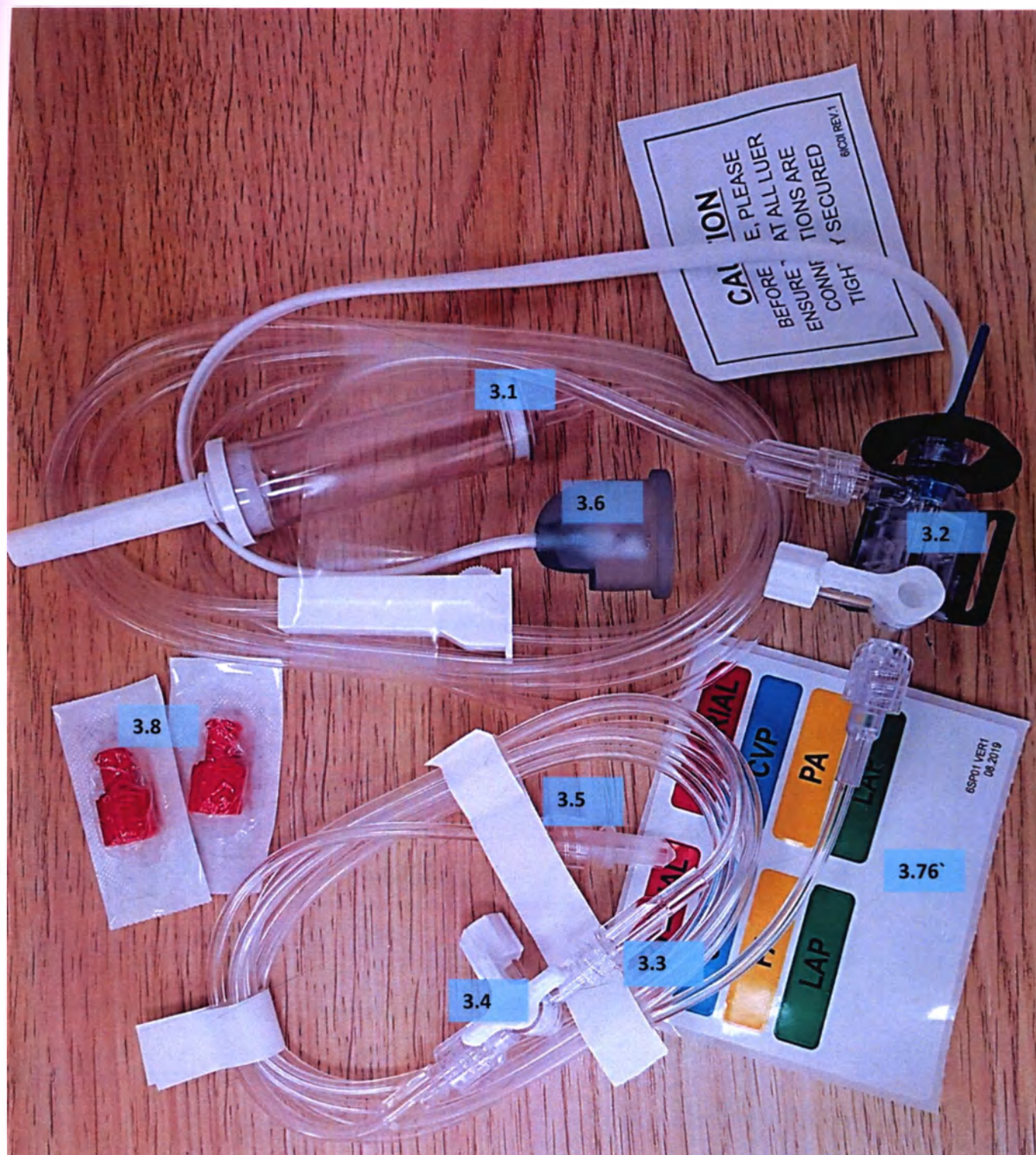


3. Набор для мониторинга давления SKY Medical с датчиком с краном с белой ручкой, арт. BP-S00003, в составе:

- 3.1. Линия инфузии с камерой-капельницей, длина 180 см - 1 шт., в составе: камера-капельница с колпачком - 1 шт., трубка - 1 шт., роликовый зажим - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт.
- 3.2. Датчик давления, одноразовый, 3 мл/ч, с краном с белой ручкой - 1 шт.
- 3.3. Соединительная линия, длина 150 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт.
- 3.4. Кран 4-х ходовой с белой ручкой - 1 шт.
- 3.5. Линия мониторинга давления, длина 15 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт., колпачок - 1 шт.
- 3.6. Кабель к процессору обработки сигналов - 1 шт.
- 3.7. Вкладыш с цветными стикерами - 1 шт.
- 3.8. Колпачок красный - 2 шт.

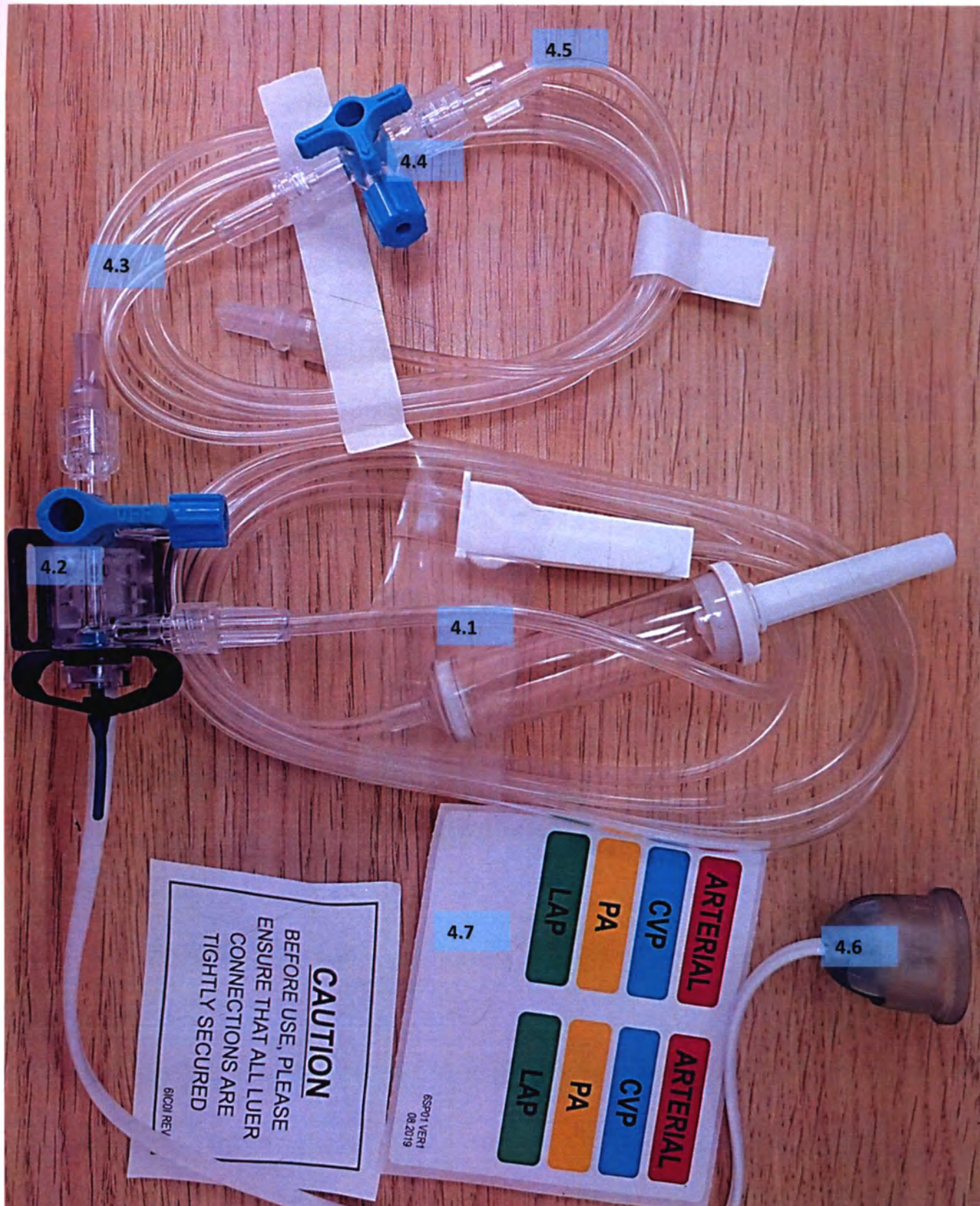


4. Набор для мониторинга давления SKY Medical с датчиком с краном с синей ручкой, арт. BP-S00019, в составе:

- 4.1. Линия инфузии с камерой-капельницей, длина 180 см - 1 шт., в составе: камера-капельница с колпачком -1 шт., трубка -1 шт., роликовый зажим - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт.
- 4.2. Датчик давления, одноразовый, 3 мл/ч, с краном с синей ручкой - 1 шт.
- 4.3. Соединительная линия, длина 125 см -1 шт., в составе: трубка -1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт.
- 4.4. Кран 4-х ходовой с синей ручкой - 1 шт.
- 4.5. Линия мониторинга давления, длина 25 см - 1 шт., в составе; трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт., колпачок - 1 шт.
- 4.6. Кабель к процессору обработки сигналов - 1 шт.

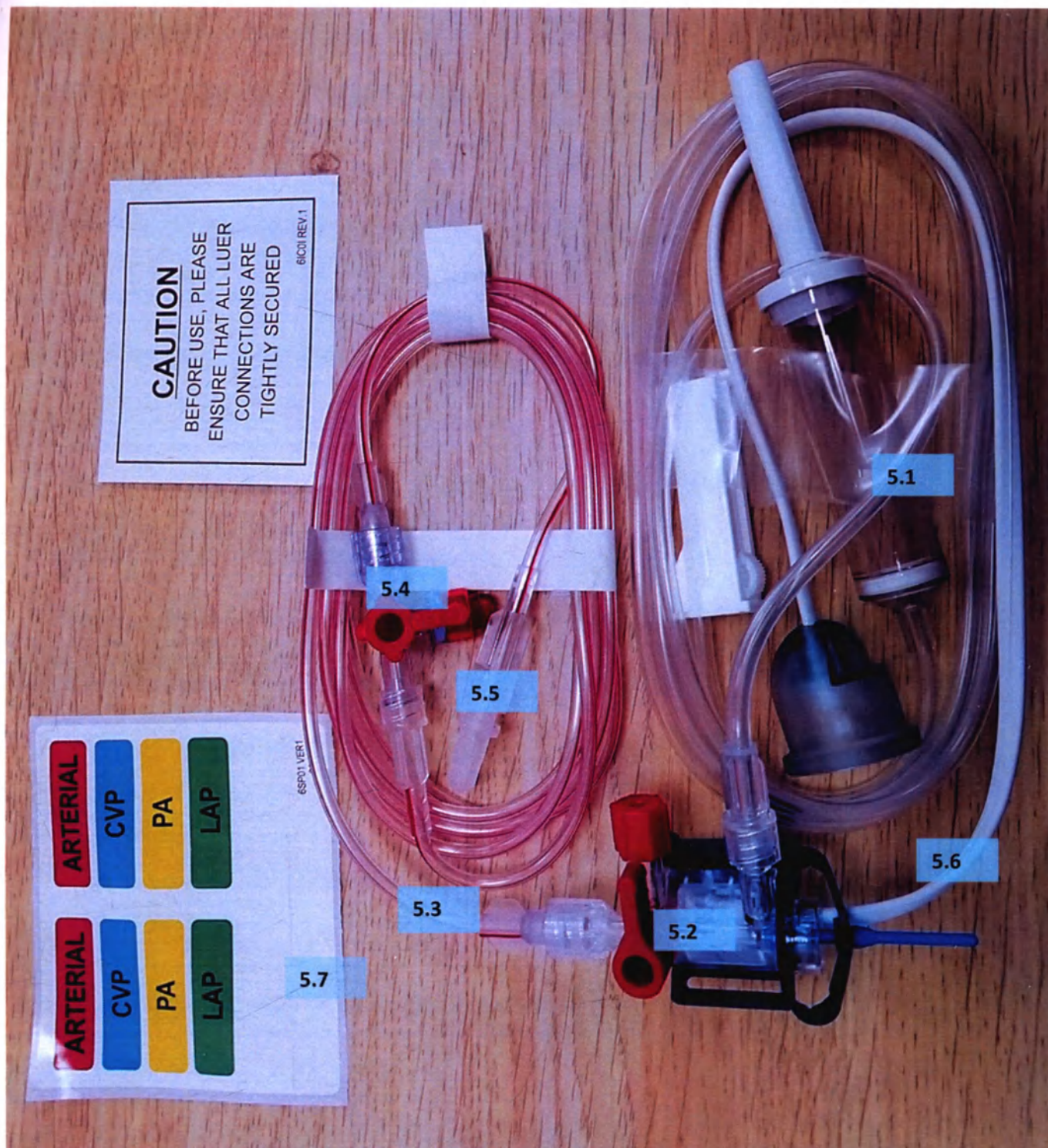


5. Набор для мониторинга давления SKY Medical с датчиком с краном с красной ручкой, арт. BP-S00028, в составе:

- 5.1. Линия инфузии с камерой-капельницей, длина 180 см - 1 шт., в составе: камера-капельница с колпачком - 1 шт., трубка - 1 шт., роликовый зажим - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт.
- 5.2. Датчик давления, одноразовый, 3 мл/ч, с краном с красной ручкой - 1 шт.
- 5.3. Соединительная линия, длина 150 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт.
- 5.4. Кран 4-х ходовой с красной ручкой и безыгольным клапаном - 1 шт.
- 5.5. Линия мониторинга давления, длина 15 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт., колпачок - 1 шт.
- 5.6. Кабель к процессору обработки сигналов - 1 шт.
- 5.7. Вкладыш с цветными стикерами - 1 шт.

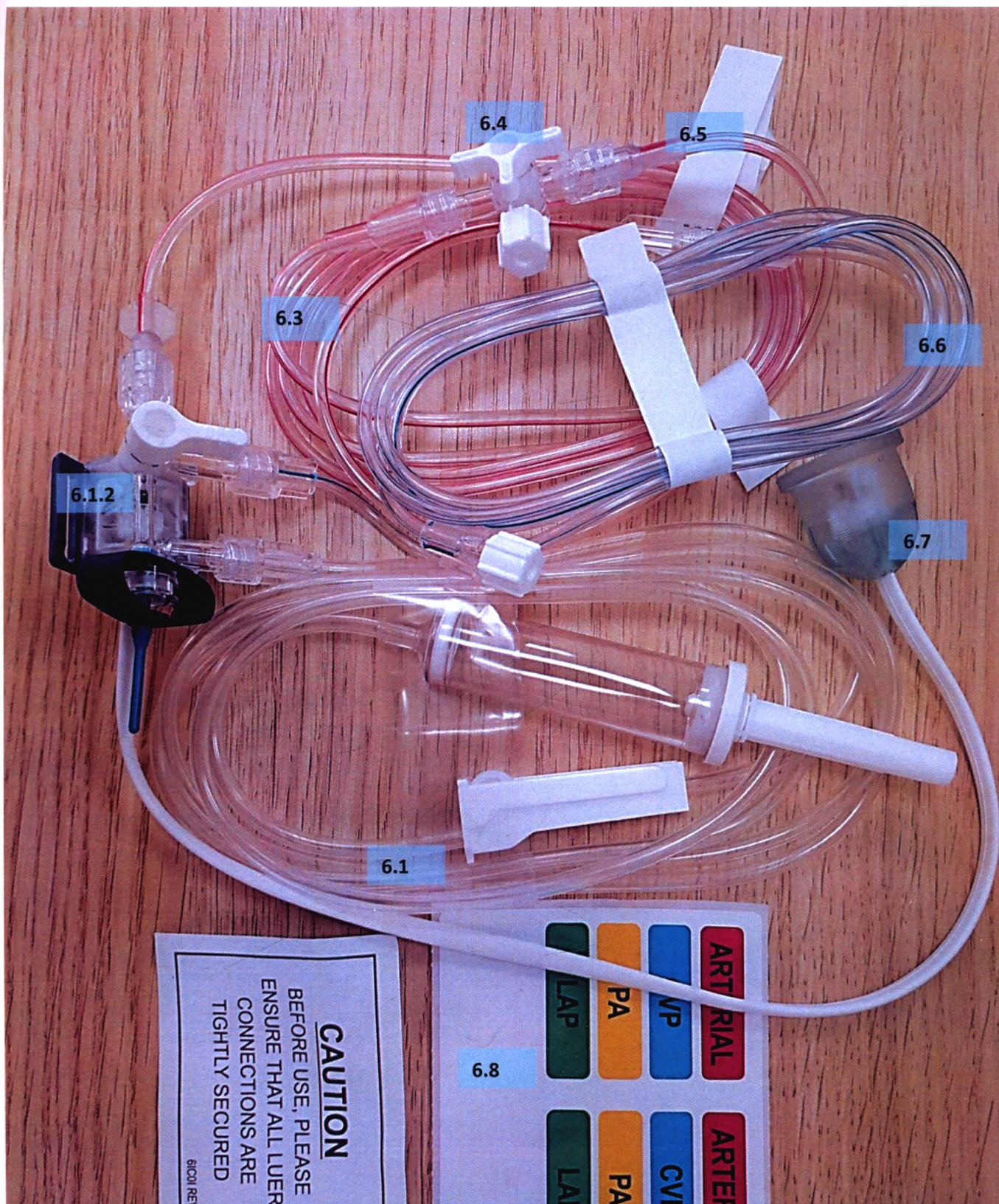

6. Набор для мониторинга кровяного давления SKY Medical с датчиком с краном с белой ручкой, арт. BP-S00042, в составе:

- 6.1. Линия инфузии с камерой-капельницей, длина 180 см - 1 шт., в составе: камера-капельница с колпачком - 1 шт., трубка - 1 шт., роликовый зажим - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт.
- 6.2. Датчик давления, одноразовый, 3 мл/ч, с краном с белой ручкой - 1 шт.
- 6.3. Соединительная линия, длина 120 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт.
- 6.4. Кран 4-х ходовой с белой ручкой - 1 шт.
- 6.5. Линия мониторинга давления, длина 15 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт., колпачок - 1 шт.
- 6.6. Линия мониторинга давления, длина 120 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт., колпачок - 1 шт.
- 6.7. Кабель к процессору обработки сигналов - 1 шт.
- 6.8. Датчик давления - 1 шт.

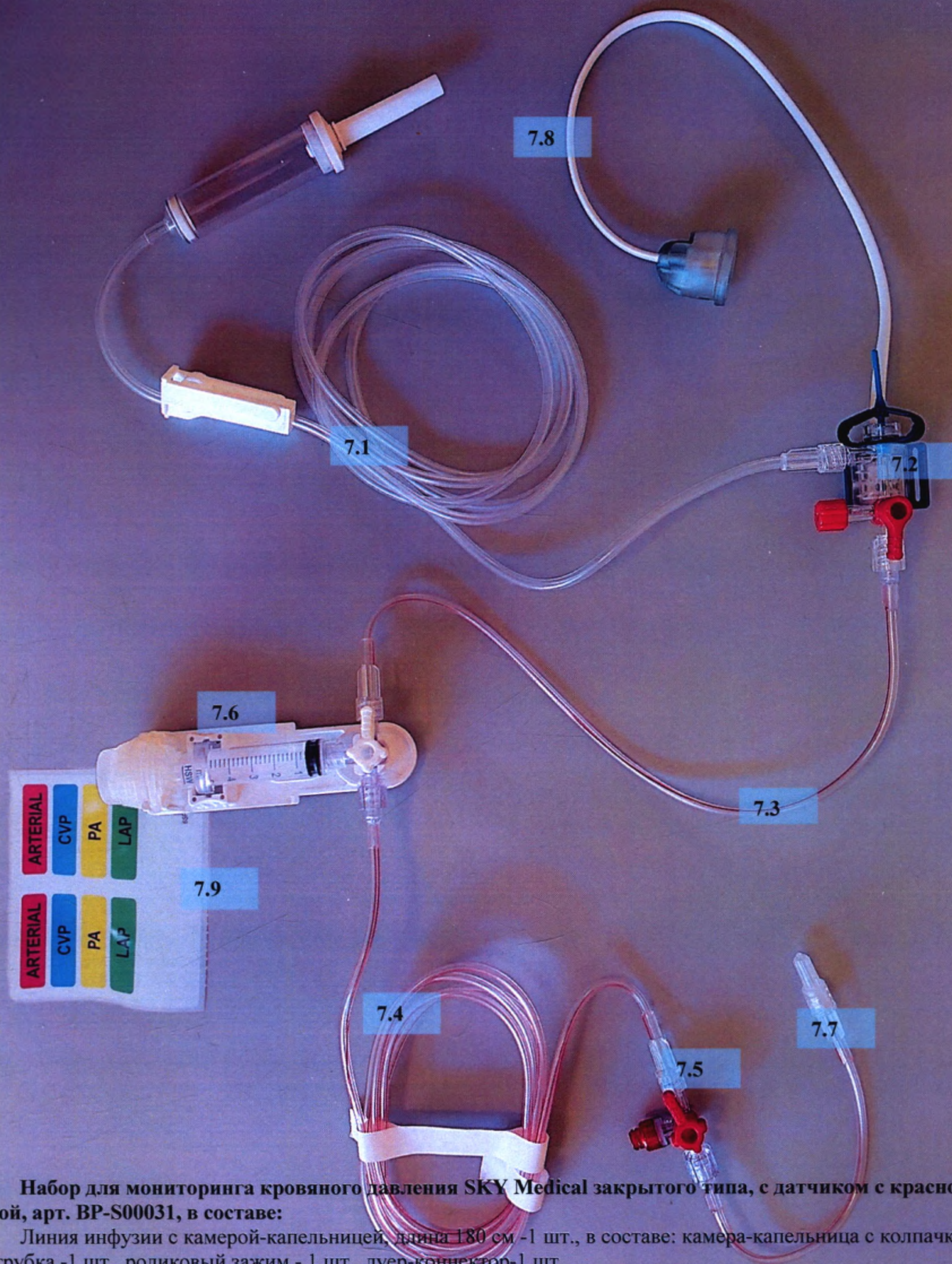


7. Набор для мониторинга кровяного давления SKY Medical закрытого типа, с датчиком с красной ручкой, арт. BP-S00031, в составе:

- 7.1. Линия инфузии с камерой-капельницей, длина 180 см - 1 шт., в составе: камера-капельница с колпачком - 1 шт., трубка - 1 шт., роликовый зажим - 1 шт., луер-коннектор - 1 шт.
- 7.2. Датчик давления, одноразовый, 3 мл/ч, с краном с красной ручкой - 1 шт.
- 7.3. Соединительная линия, длина 30 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт.
- 7.4. Соединительная линия, длина 150 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт.
- 7.5. Кран 4-х ходовой с красной ручкой и безыгольным клапаном - 1 шт.
- 7.6. Шприц с краном с белой ручкой - 1 шт.
- 7.7. Линия мониторинга давления, длина 15 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт., колпачок - 1 шт.
- 7.8. Кабель к процессору обработки сигналов - 1 шт.
- 7.9. Вкладыш с цветными стикерами - 1 шт.




8. Набор для мониторинга кровяного давления SKY Medical закрытого типа, с датчиком с краном с белой ручкой, арт. BP-S00032, в составе:

- 8.1. Датчик давления, одноразовый, 3 мл/ч, с краном с белой ручкой - 1 шт.
- 8.2. Колпачок - 3 шт.
- 8.3. Кабель к процессору обработки сигналов - 1 шт.

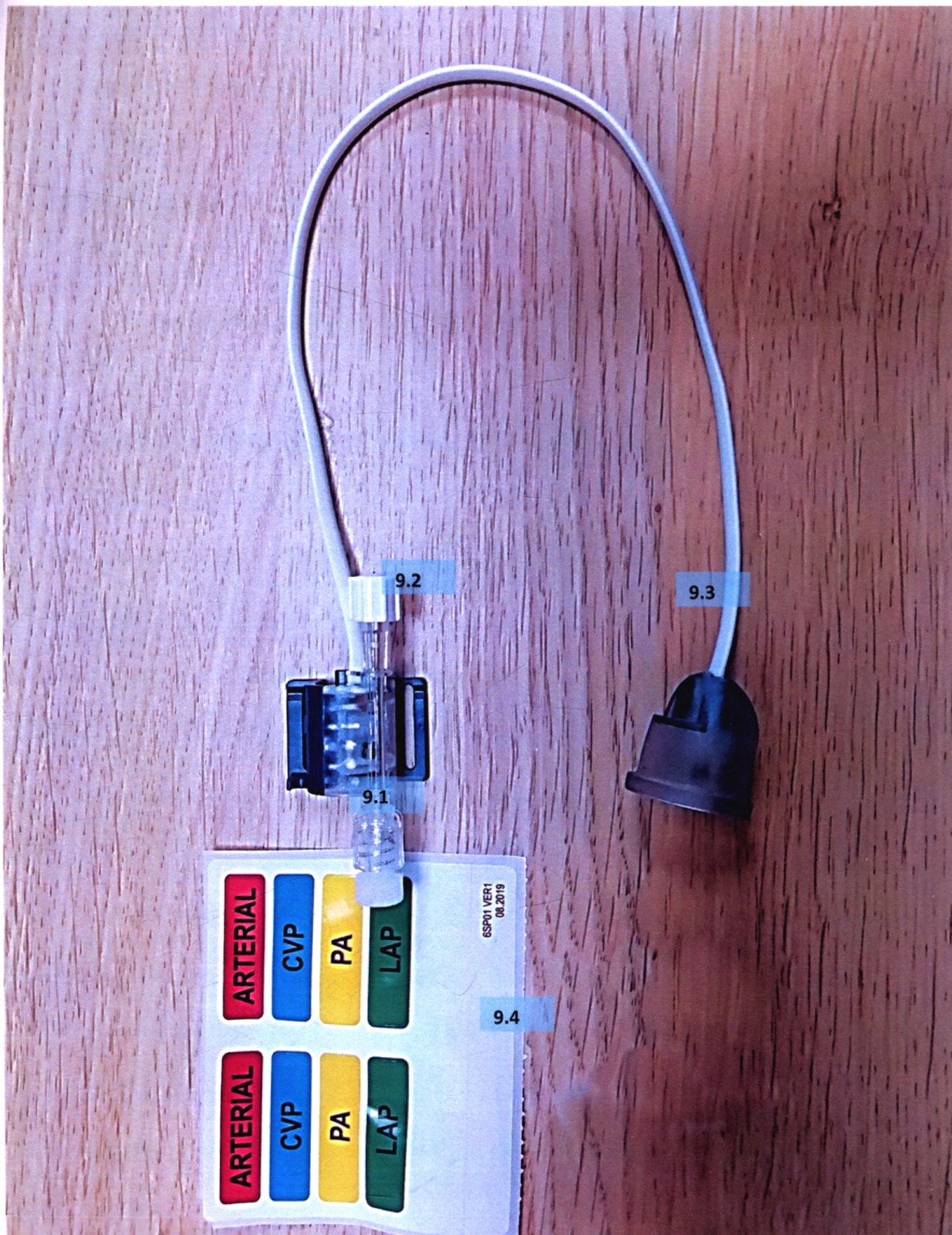


9. Набор для мониторинга кровяного давления SKY Medical закрытого типа, с датчиком, арт. BP-S00004, в составе:

- 9.1. Датчик давления, одноразовый, 3 мл/ч - 1 шт.
- 9.2. Колпачок - 2 шт.
- 9.3. Кабель к процессору обработки сигналов - 1 шт.
- 9.4. Вкладыш с цветными стикерами - 1 шт.

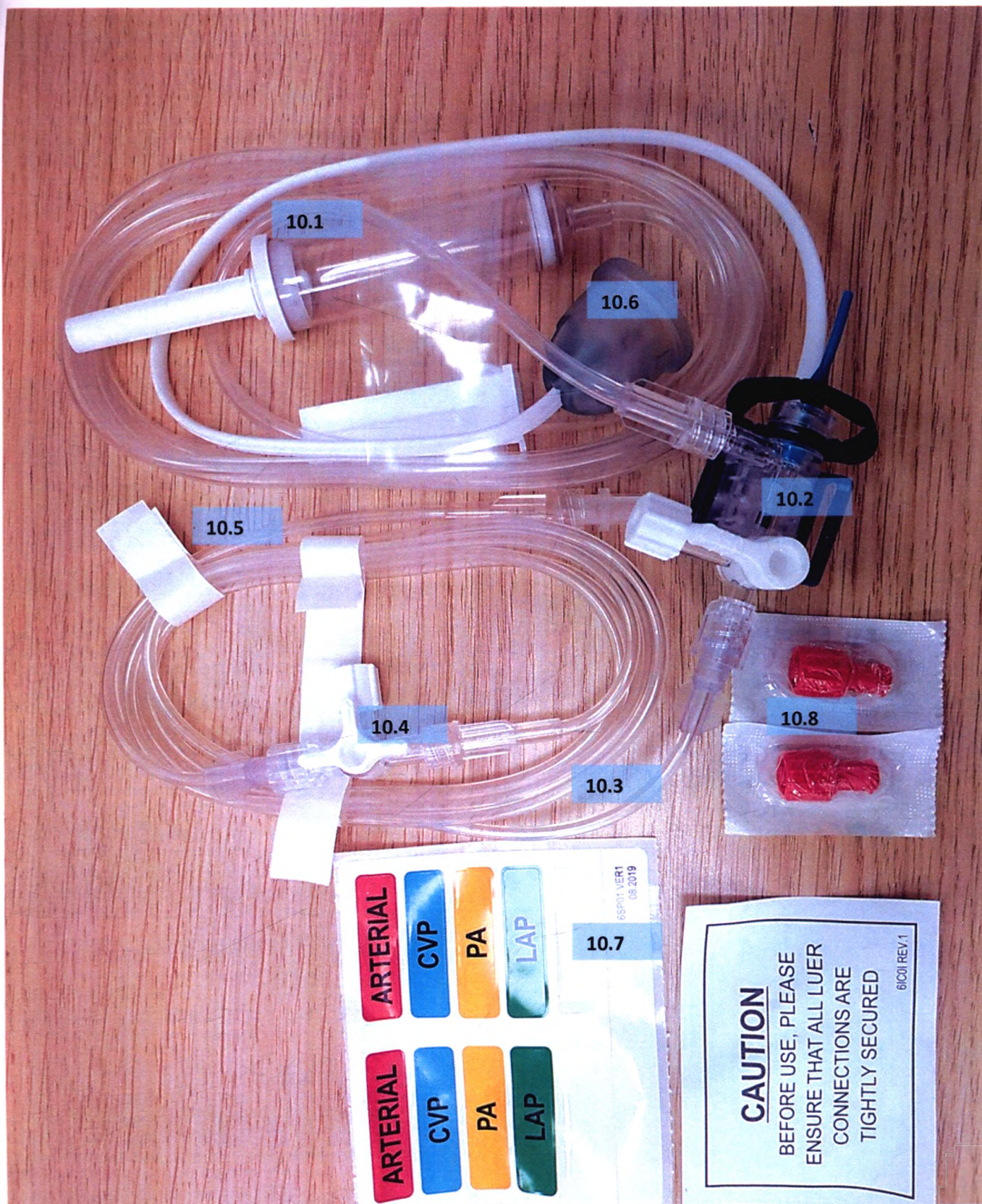


10. Набор для мониторинга кровяного давления SKY Medical с датчиком с краном с белой ручкой, прозрачный, арт. BP-S00033, в составе;

- 10.1. Линия инфузии с камерой-капельницей, длина 180 см - 1 шт., в составе: камера-капельница с колпачком - 1 шт., трубка - 1 шт., роликовый зажим - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт.
- 10.2. Датчик давления, одноразовый, 3 мл/ч. с краном с белой ручкой - 1 шт.
- 10.3. Соединительная линия, длина 120 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт.
- 10.4. Кран 4-х ходовой с белой ручкой - 1 шт.
- 10.5. Линия мониторинга давления, длина 30 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт., колпачок - 1 шт.
- 10.6. Кабель к процессору обработки сигналов - 1 шт.
- 10.7. Вкладыш с цветными стикерами - 1 шт.
- 10.8. Колпачок красный - 2 шт.

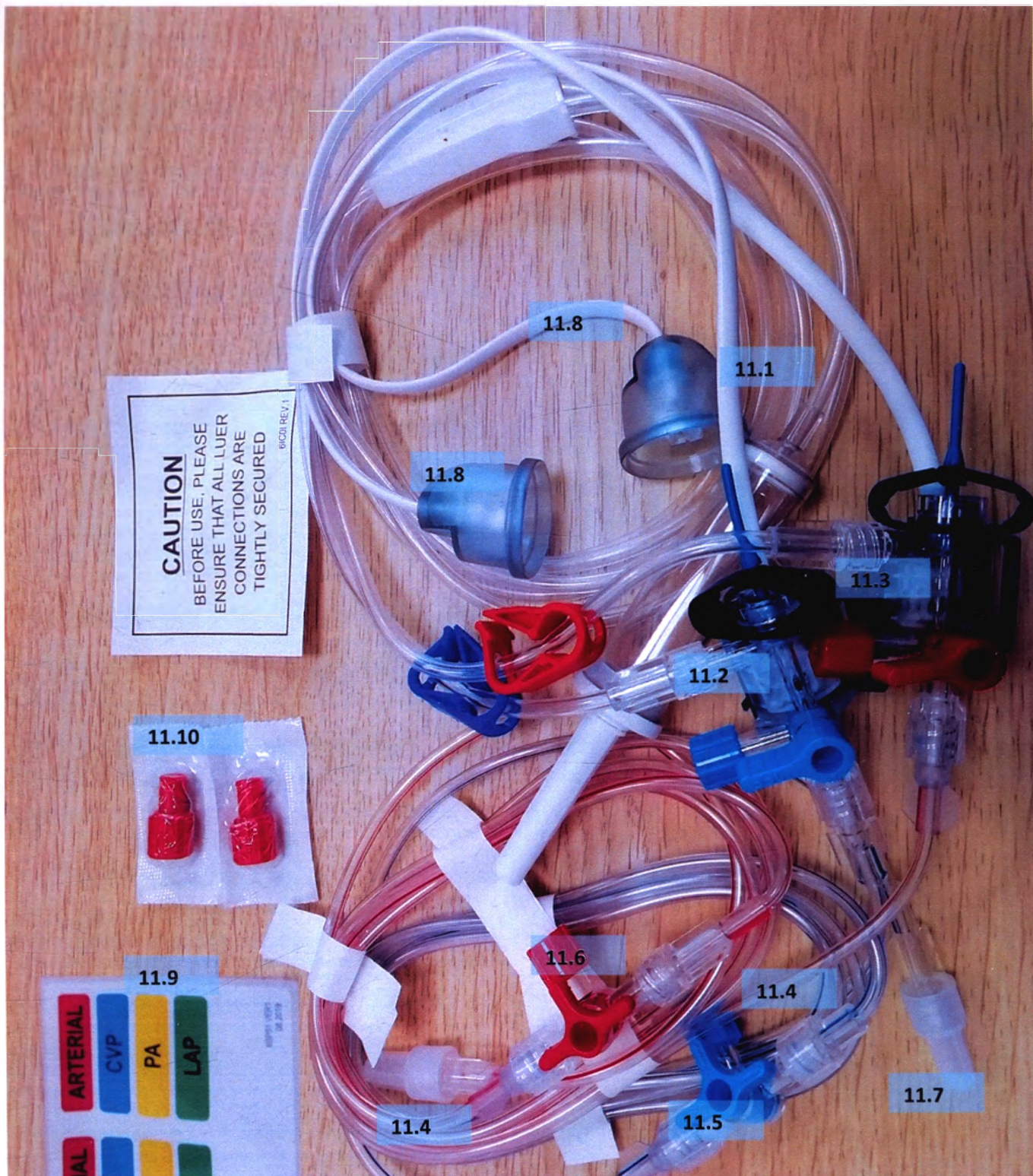


11. Набор для мониторинга давления SKY Medical с двумя датчиками с кранами с красной и синей ручкой, арт. BP-D00001, в составе:

- 11.1. Линия инфузии с камерой-капельницей, длина 180 см - 1 шт., в составе: камера-капельница с колпачком - 1 шт., трубка - 1 шт., роликовый зажим - 1 шт., 3 ходовой У-образный соединитель - 1 шт.
- 11.2. Датчик давления, одноразовый, 3 мл/ч, с краном с синей ручкой - 1 шт.
- 11.3. Датчик давления, одноразовый, 3 мл/ч, с краном с красной ручкой - 1 шт.
- 11.4. Соединительная линия, длина 120 см - 2 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт.
- 11.5. Кран 4-х ходовой с синей ручкой - 1 шт.
- 11.6. Кран 4-х ходовой с красной ручкой - 1 шт.
- 11.7. Линия мониторинга давления, длина 30 см - 2 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт., колпачок - 1 шт.
- 11.8. Кабель к процессору обработки сигналов - 2 шт.
- 11.9. Вкладыш с цветными стикерами - 1 шт.
- 11.10. Колпачок красный - 2 шт.

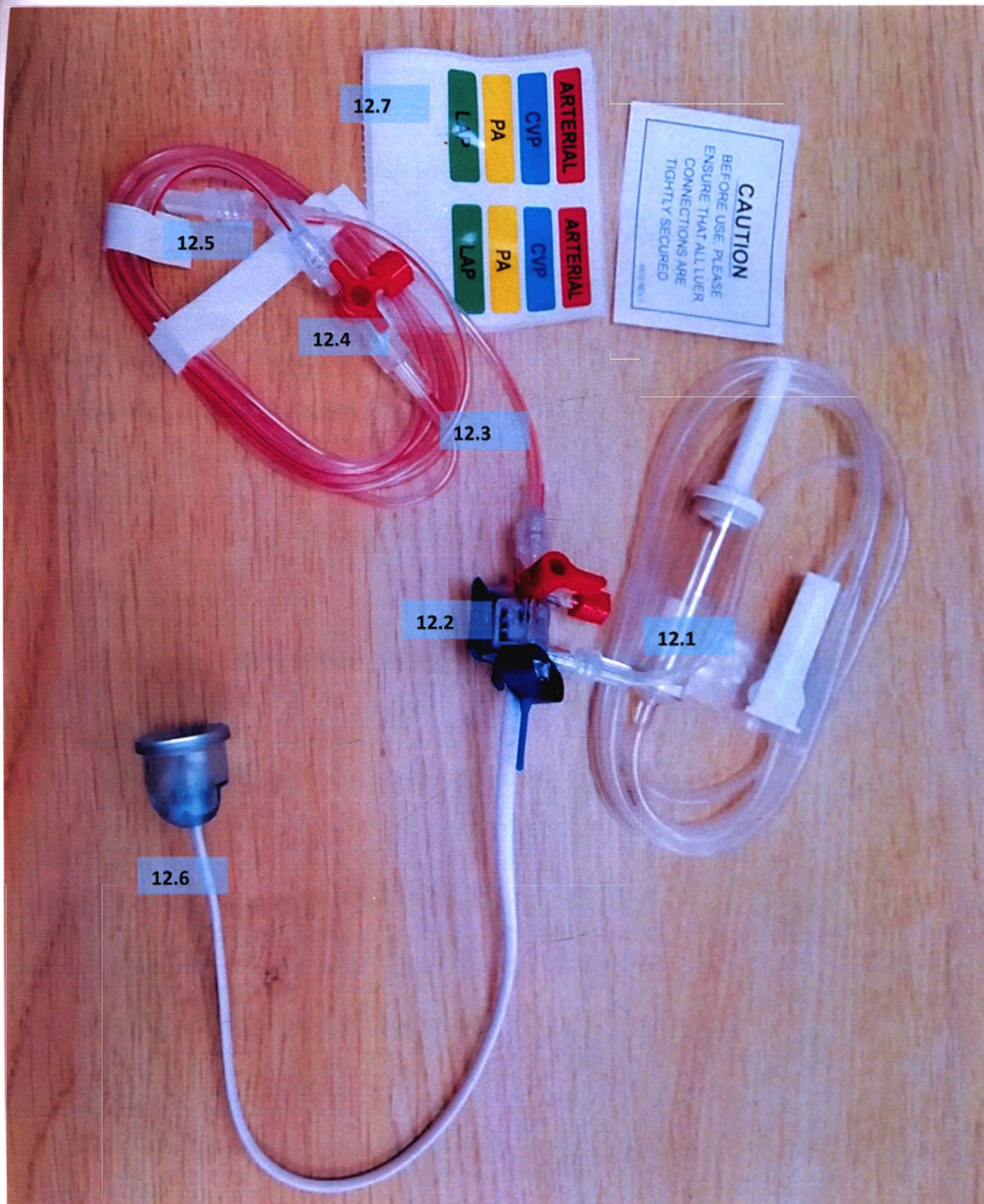


12. Набор для мониторинга давления SKY Medical с датчиком с краном с красной ручкой, арт. ВР-S00035, в составе:

- 12.1. Линия инфузии с камерой-капельницей, длина 180 см - 1 шт., в составе: камера-капельница с колпачком - 1 шт., трубка - 1 шт., роликовый зажим - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт.
- 12.2. Датчик давления, одноразовый, 3 мл/ч, с краном с красной ручкой - 1 шт.
- 12.3. Соединительная линия, длина 135 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт.
- 12.4. Кран 4-х ходовой с красной ручкой - 1 шт.
- 12.5. Линия мониторинга давления, длина 25 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт., колпачок - 1 шт.
- 12.6. Кабель к процессору обработки сигналов - 1 шт.
- 12.7. Вкладыш с цветными стикерами - 1 шт.

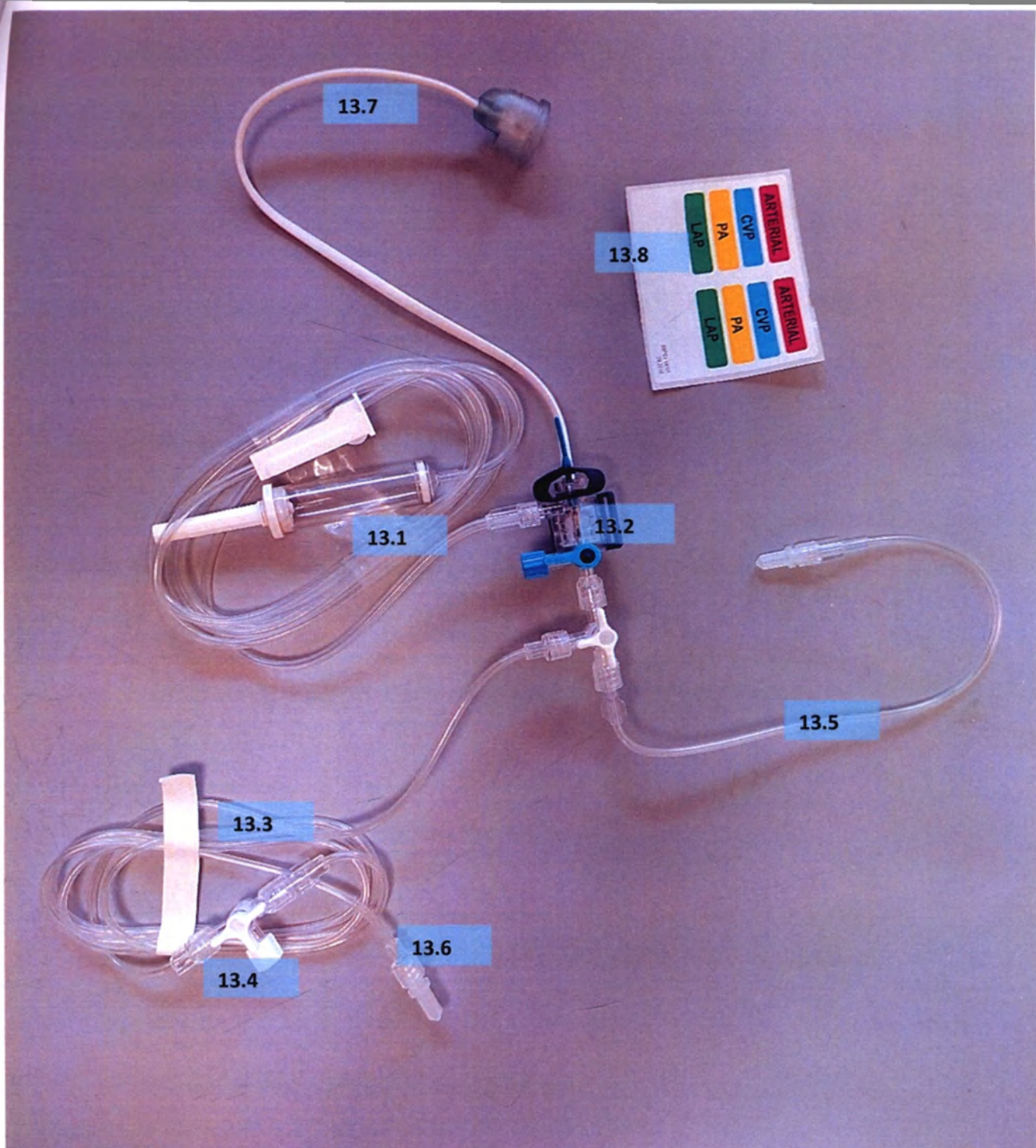


13. Набор для мониторинга кровяного давления SKY Medical с датчиком с краном с синей ручкой, арт. BP-S00037, в составе:

- 13.1. Линия инфузии с камерой-капельницей, длина 180 см - 1 шт., в составе: камера-капельница с колпачком - 1 шт., трубка - 1 шт., роликовый зажим - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт.
- 13.2. Датчик давления, одноразовый, 3 мл/ч, с краном с синей ручкой - 1 шт.
- 13.3. Линия мониторинга давления, длина 120 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт., колпачок - 1 шт.
- 13.4. Кран 4-х ходовой с белой ручкой - 1 шт.
- 13.5. Линия мониторинга давления, длина 30 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт., колпачок - 1 шт.
- 13.6. Соединительная линия, длина 15 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 2 шт.,
- 13.7. Кабель к процессору обработки сигналов - 1 шт.
- 13.8. Вкладыш с цветными стикерами - 1 шт.

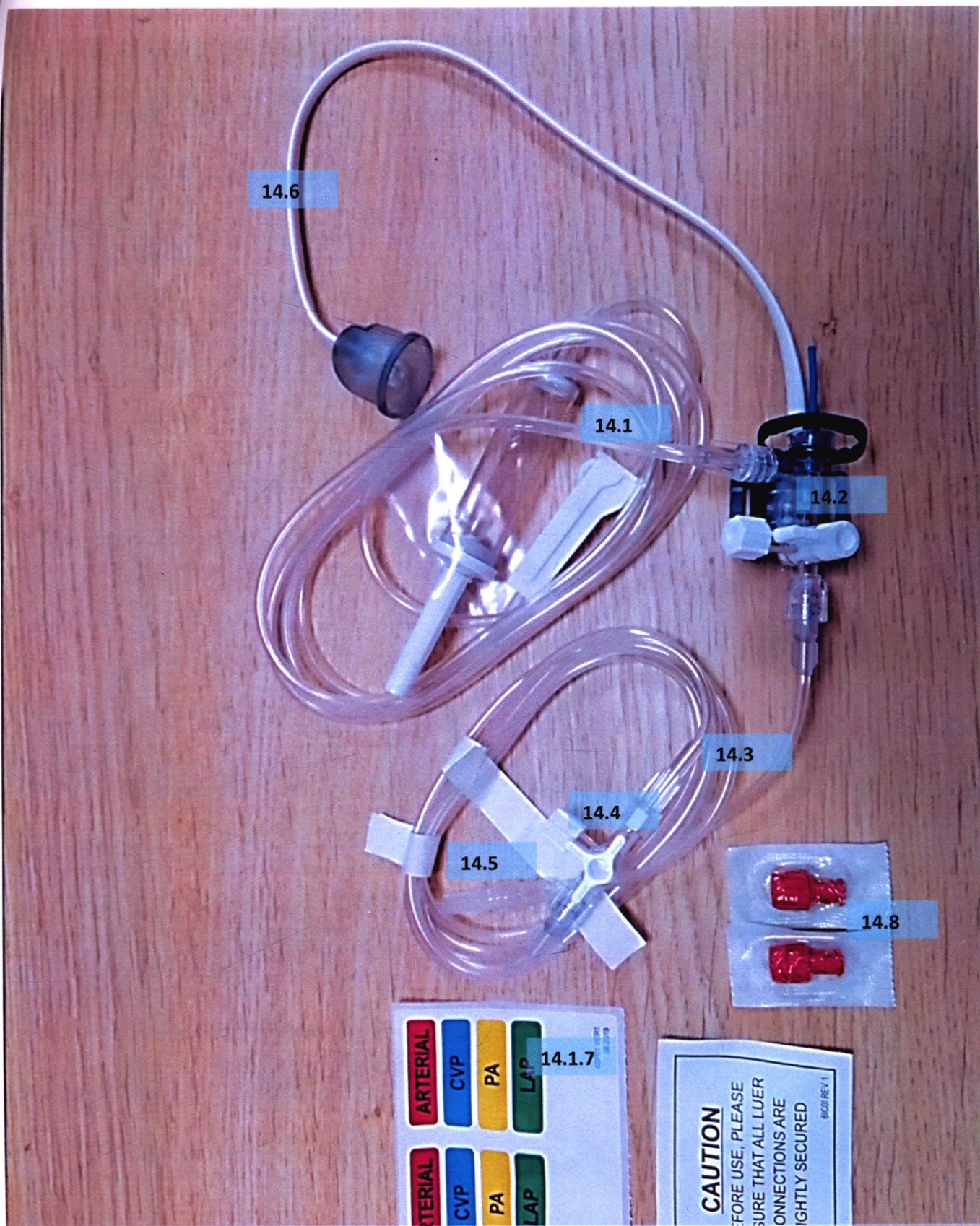


14. Набор для мониторинга кровяного давления SKY Medical с датчиком с краном с белой ручкой, арт. BP-S00038 в составе:

- 14.1. Линия инфузии с камерой-капельницей, длина 180 см - 1 шт., в составе: камера-капельница с колпачком - 1 шт., трубка - 1 шт., роликовый зажим - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт.,
- 14.2. Датчик давления, одноразовый, 3 мл/ч, с краном с белой ручкой - 1 шт.,
- 14.3. Соединительная линия, длина 200 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт.
- 14.4. Кран 4-х ходовой с белой ручкой - 1 шт.
- 14.5. Линия мониторинга давления, длина 50 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт., колпачок - 1 шт.
- 14.6. Кабель к процессору обработки сигналов - 1 шт.
- 14.7. Вкладыш с цветными стикерами - 1 шт.

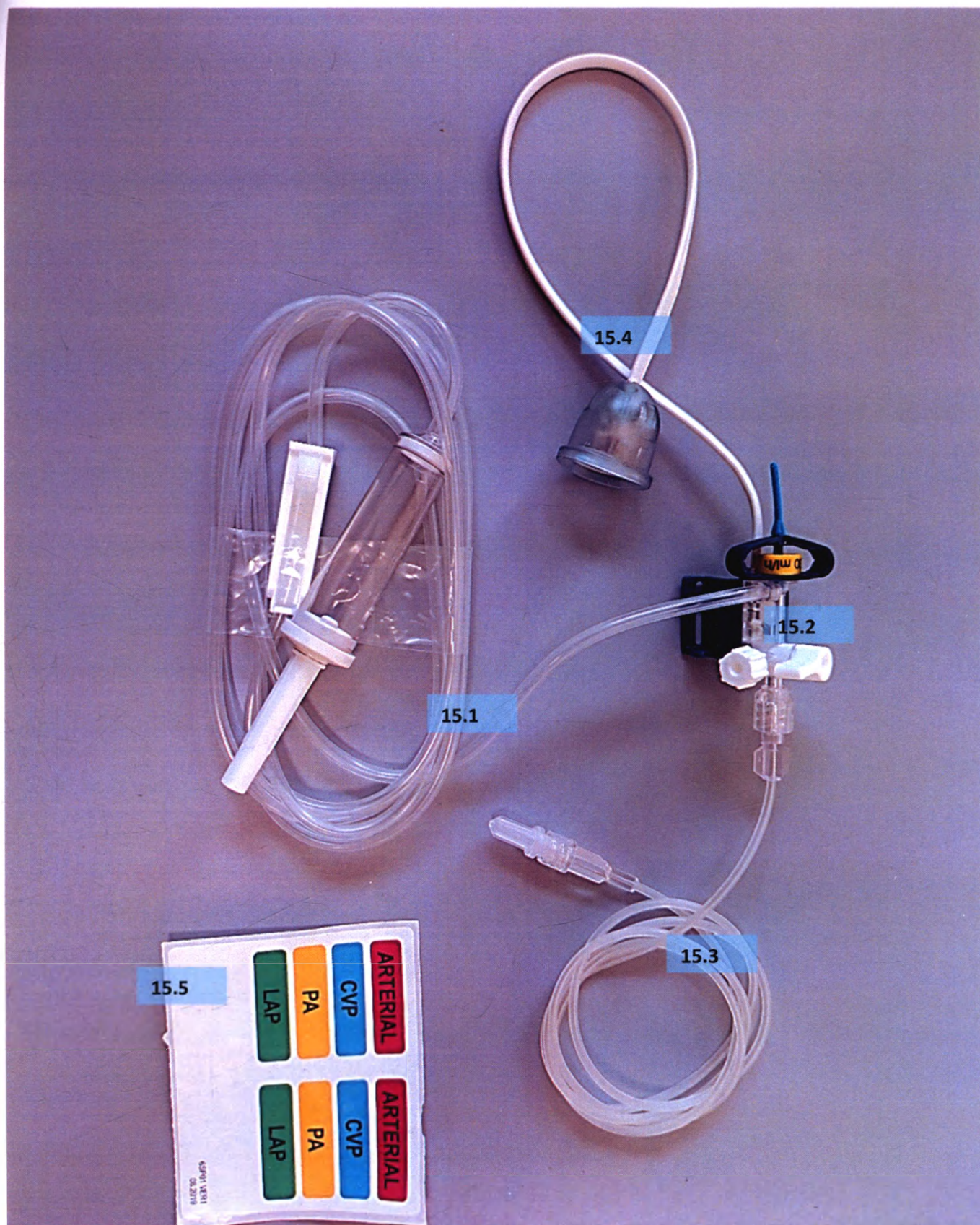


15. Набор для мониторинга кровяного давления SKY Medical неонатальный, с датчиком с краном с белой ручкой, арт. BP-SN0003, в составе:

- 15.1. Линия инфузии с камерой-капельницей, длина 180 см -1 шт., в составе: камера-капельница с колпачком - 1 шт., трубка - 1 шт., роликовый зажим - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт.
- 15.2. Датчик давления, одноразовый, 30 мл/ч, с краном с белой ручкой - 1 шт.
- 15.3. Линия мониторинга давления, длина 100 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт., колпачок - 1 шт.
- 15.4. Кабель к процессору обработки сигналов - 1 шт.
- 15.5. Вкладыш с цветными стикерами - 1 шт.

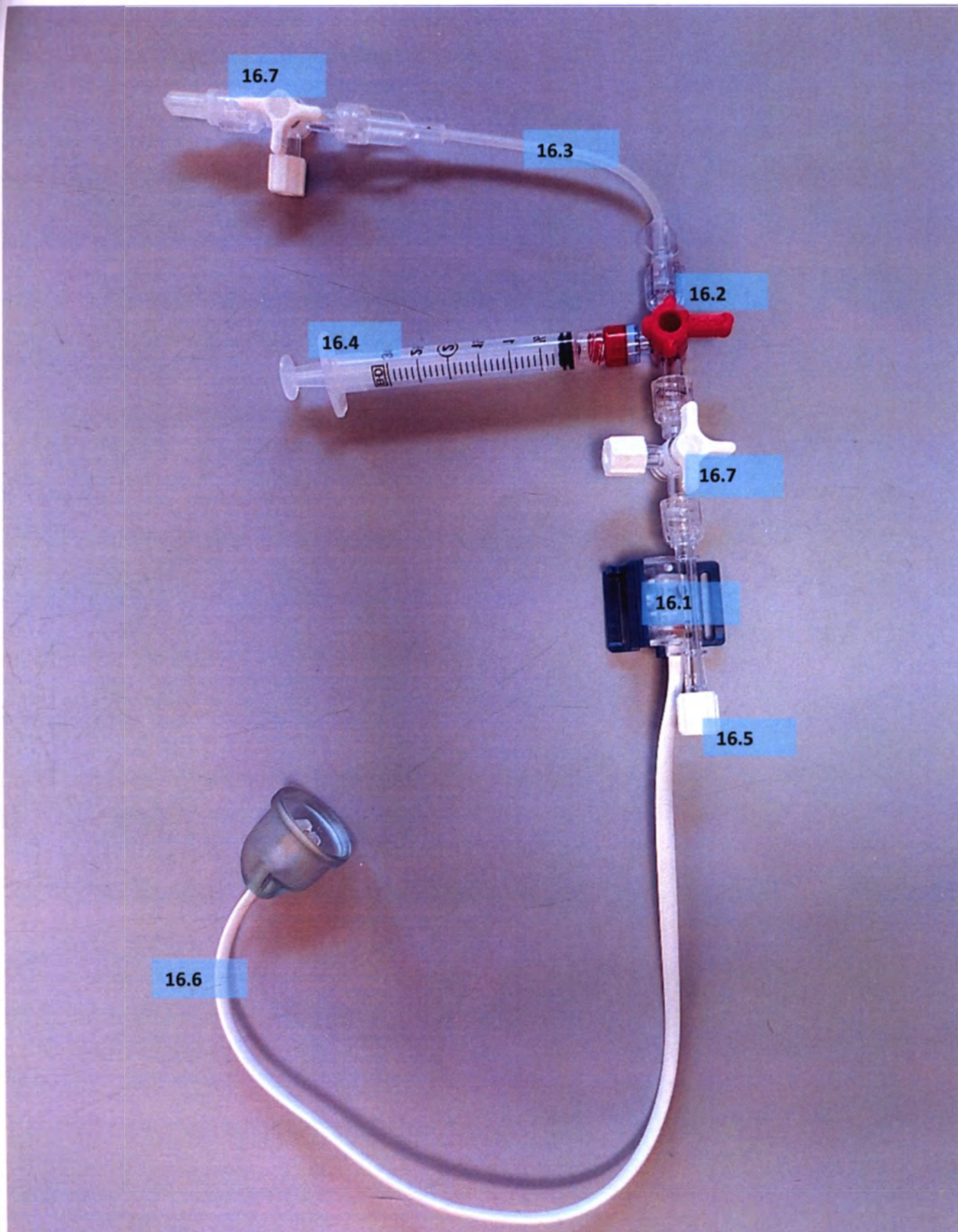


16. Набор для мониторинга кровяного давления SKY Medical педиатрический/неонатальный, закрытого типа, с датчиком, арт. BP- SN0004, в составе:

- 16.1. Датчик давления, одноразовый, 3 мл/ч - 1 шт.
- 16.2. Кран 4-х ходовой с красной ручкой и безыгольным клапаном - 1 шт.
- 16.3. Линия мониторинга давления, длина 10 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F-1 шт.
- 16.4. Шприц - 1 шт.
- 16.5. Колпачок - 4 шт.
- 16.6. Кабель к процессору обработки сигналов - 1 шт.
- 16.7. Кран 4-х ходовой с белой ручкой - 2 шт.

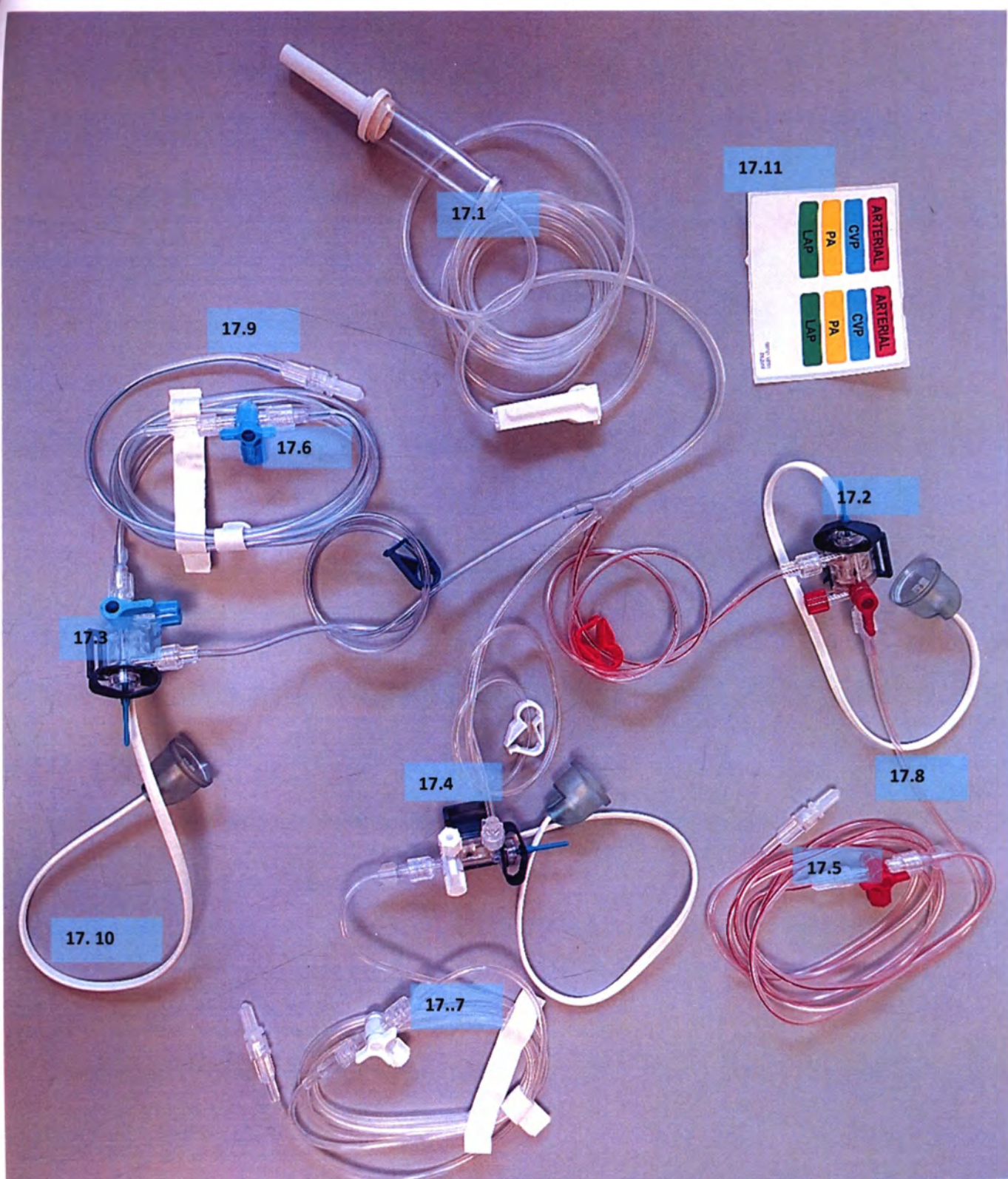


17. Набор для мониторинга кровяного давления SKY Medical с тремя датчиками с кранами с белой, красной, синей ручкой, арт. BP-T00001, в составе:

- 17.1. Линия инфузии с камерой-капельницей, длина 180 см - 1 шт., в составе: камера-капельница с колпачком - 1 шт., трубка - 1 шт., роликовый зажим - 1 шт., 4-ходовой Y-образный соединитель - 1 шт.
- 17.2. Датчик давления, одноразовый, 3 мл/ч, с краном с красной ручкой - 1 шт.
- 17.3. Датчик давления, одноразовый, 3 мл/ч, с краном с синей ручкой - 1 шт.
- 17.4. Датчик давления, одноразовый, 3 мл/ч, с краном с белой ручкой - 1 шт.
- 17.5. Кран 4-х ходовой с красной ручкой - 1 шт.
- 17.6. Кран 4-х ходовой с синей ручкой - 1 шт.
- 17.7. Кран 4-х ходовой с белой ручкой - 1 шт.
- 17.8. Соединительная линия, длина 150 см - 3 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт.
- 17.9. Линия мониторинга давления, длина 30 см - 3 шт., в составе: трубка - 1 шт., луер-коннектор М - 1 шт., луер-коннектор F - 1 шт., колпачок - 1 шт.
- 17.10. Кабель к процессору обработки сигналов - 3 шт.
- 17.11. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

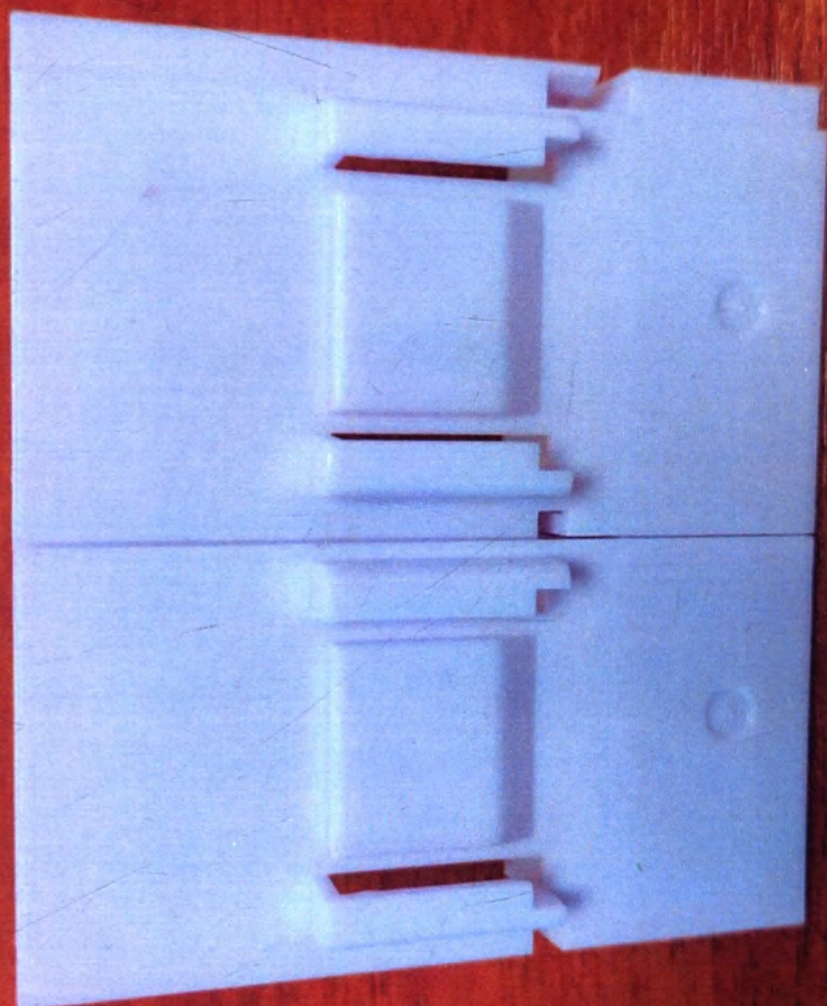

II. Принадлежности:

1. Органайзер DPT с двумя пластинами, арт. DO-D0002

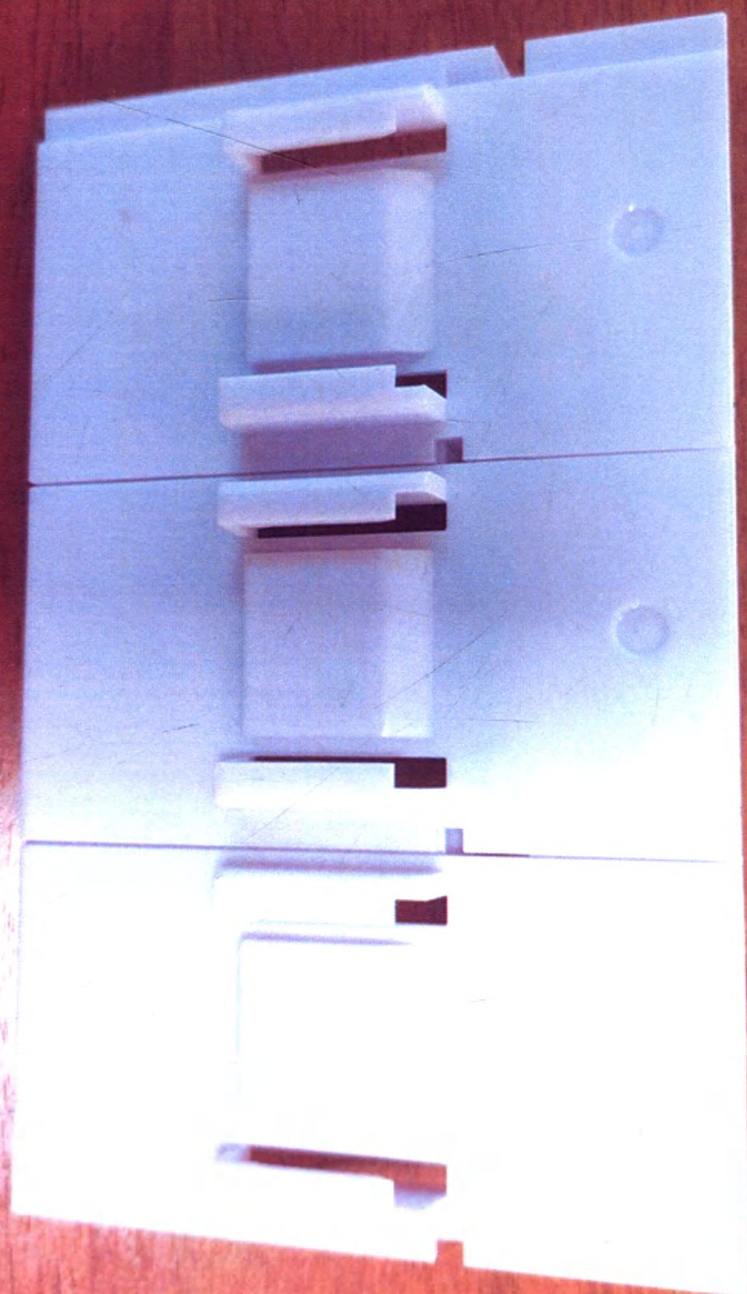

- II. Принадлежности:**
2. Органайзер DPT с тремя пластинами, арт. DO-D0003



II. Принадлежности:

3. Крепежное устройство для органайзера, арт.DO-H0000

Краткая инструкция по применению

Перед началом работы с набором ознакомиться с инструкцией по применению



1. Подключите переходный кабель к монитору.
2. Визуально проверьте целостность упаковки.
3. **Изделие стерильно, не использовать, если упаковка повреждена или открыта**
4. Откройте стерильную упаковку комплекта, используя антисептические средства.
4. Убедитесь, что все соединения зафиксированы.



ВНИМАНИЕ! Перед применением убедиться в надежности подсоединения люер-коннекторов!

Все соединения должны быть затянуты вручную. Чрезмерное затягивание может вызвать трещины и утечки, которые могут привести к эмболии и/или воздействию биологической опасности.



5. Подключите кабель датчика к многоканальному кабелю через встроенный закрытый разъем RJ-11.

Корпуса разъемов и контакты разъема датчика не должны контактировать с жидкостью, так как это может вызвать коррозию контактов



6. Отсоединение кабеля во время использования означает неправильное считывание или отсутствие считывания.
7. Заполните набор трубок и удалите воздух из пакета с промывочным раствором для внутривенных вливаний в соответствии с политикой больницы.



Если не удалить весь воздух из пакета, воздух может попасть в сосудистую систему пациента, когда раствор закончится

8. Закройте роликовый зажим на комплекте для внутривенных вливаний и подсоедините комплект для внутривенных вливаний к пакету для промывки. Подсоедините пакет примерно в 60 см над пациентом. Эта высота обеспечивает давление примерно 45 мм рт. ст. к первичной настройке.

9. Наполовину заполните капельницу промывочным раствором, сжав капельницу. Откройте роликовый зажим.

10. Для заполнения системы:

a. Для датчиков без встроенной системы заполнения промывочного устройства в соответствии с политикой больницы.

b. Для датчиков со встроенным промывочным устройством сжатие промывочного устройства обеспечивает поток.

11. Если в комплект входит набор для внутривенных инфузий, откройте вентиляционное отверстие датчика, повернув ручку запорного крана. Подайте промывочный раствор сначала через датчик и через вентиляционное отверстие, затем через установленную линию мониторинга.

Убедитесь, что воздух не попадает в пациента через запорный кран, который был случайно оставлен открытым из-за случайного отключения системы давления или из-за попадания пузырьков остаточного воздуха в пациента



Проверяйте отсутствие утечки жидкости до и во время процедуры. Утечки могут привести к потере стерильности, потере жидкости или крови и/или воздушной эмболии.

Если изделие протекает до или во время использования, повторно затяните протекающее соединение или замените изделие

Эксплуатация со шприцевым инфузионным насосом

1. Подсоедините комплект физиологических датчиков давления к шприцу.
2. Поместите шприц в шприцевой инфузионный насос.
3. Используйте шприцевой инфузионный насос в варианте «проталкивание жидкости».
4. Если датчик имеет встроенное промывочное устройство, заливка будет производиться при сжатии промывочного устройства до тех пор, пока раствор не заполнит комплект.
5. Замените все крышки с отверстиями на боковых портах запорных кранов на крышки без отверстий.
6. Установите датчик либо на тело пациента во время госпитальной процедуры, либо на держатель.
7. Подайте давление в пакет с промывочным раствором для внутривенных вливаний. Скорость потока будет регулироваться шприцевым инфузионным насосом.
8. Подсоедините к катетеру трубку высокого давления.
9. Система промывки согласна политике больницы.

Обнуление и калибровка

1. Чтобы обеспечить единообразие и точность измерения артериального давления, установите датчик давления таким образом, чтобы вентиляционное отверстие встроенного трехходового крана находилось на уровне анатомически соответствующего участка - флебостатической оси.
2. Поверните запорный кран датчика так, чтобы он был закрыт для пациента. Снимите крышку без отверстий и откройте вентиляционное отверстие в атмосферу.
3. Если ручка запорного крана находится в неправильном положении, произойдет отсутствие считывания или неверное считывание, медицинская процедура не выполняется должным образом.
4. Отрегулируйте монитор так, чтобы он показывал ноль мм рт.ст.
5. Проверьте калибровку монитора, используя процедуру, рекомендованную производителем монитора.
6. Закройте вентиляционное отверстие со стороны атмосферы и замените крышку без отверстий.
7. Система готова начать движение под давлением.

Забор крови с помощью шприца

1. Временно отключите сигналы монитора. Отвинтите колпачок люер-коннектора на линии пациента и поместите его внутрь марлевого пакета.
2. Подключите шприц на 3 или 5 мл по мере необходимости.
3. Поверните запорный кран на промывочном пакете в положение «выкл» и возьмите 3 мл крови, чтобы очистить мертвое пространство в линии, если необходимо, или больше, если мертвое пространство больше.
4. Поверните запорный кран в положение «выкл» по отношению к пациенту и снимите шприц.
5. Подключите шприц объемом 10 или 20 мл в зависимости от необходимого объема крови.
6. Поверните запорный кран на промывочном пакете в положение «выкл» и аккуратно возьмите необходимое количество крови.
7. Поверните запорный кран к открытому порту и снимите шприц.
8. Очистите линию от крови с помощью устройства для промывки датчика.
9. Поверните запорный кран в положение «выкл» по отношению к пациенту и слейте кровь из порта.
10. Поверните запорный кран в положение «выкл» по отношению к открытому порту и убедитесь, что артериальная кривая возвращается на монитор. При необходимости заново обнулите артериальную линию к монитору.

Установите или замените крышку на порт при необходимости.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Меры предосторожности:

Если есть подозрение в неисправности или сбое работы изделия, например, значения, отображаемые на прикроватном мониторе, неточны или если кривые нечеткие, перед дальнейшим использованием нужно проверить динамический отклик (достоверность) системы давления, выполнив испытание быстрой промывки или испытание прямоугольной волны.

Испытание динамического отклика

1. Быстро сожмите язычок или защелку на устройстве промывки, затем быстро отпустите его.
2. На мониторе должна отображаться форма волны, которая внезапно и резко, достигает максимума, затем резко падает. После отпущения появляются одно или два колебания выше и ниже исходной линии.
3. Оцените динамический отклик.



Плохой динамический отклик может быть вызван пузырьками воздуха, свертыванием, чрезмерной длиной трубки, чрезмерно плохим давлением трубки. Трубки с малым внутренним диаметром, ослабленными соединениями или утечками.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЕ/УПРАВЛЕНИЕ
Сложность с обнулением - Не достигает 0 формы волны - Не достигает исходного уровня - Обнуляется, но не отображает числа на мониторе	Не подключено должным образом. Линия не проходит через датчик надлежащим образом. Неисправный датчик или кабель давления. Отображение числа не настроено/не выбрано на мониторе для АД. Система не открыта для воздуха	Проверьте все оборудование и соединения с помощью монитора. Убедитесь, что все роликовые зажимы открыты. Проверьте систему на наличие пузырьков воздуха и сгустков крови. Выполните повторную калибровку. Замените датчик, кабель и/или модуль. Замените артериальную линию (крайний случай)
Закупорка/свертывание/воздушная эмболия	Перекрученная линия. Отсоединение или неплотное соединение. Недостаточное давление на давящий пакет. Недостаточно жидкости в 0,9% хлориде натрия в давящем пакете. Линия не промывается, когда в линии присутствует кровь. Линия не заполнена должным образом.	Чтобы предотвратить: Держите давящий пакет надутым, чтобы обеспечить давление 300 мм рт. ст. (3-5 мл/ч). Убедитесь, что все соединения зафиксированы. Следите за тем, чтобы в линии и порте для забора крови не было крови. Используйте устройство быстрой промывки, чтобы очистить линию, чтобы предотвратить образование сгустков. Никогда не смывайте сгусток или воздушную эмболию в пациента. При сгустке/воздушной эмболии: Попытайтесь аспирировать кровь/воздух, чтобы удалить сгусток.
Ложно завышенные или заниженные показания Затухшая волна (затухание чрезмерно или занижено)	Неправильное размещение или датчик, слишком высокий или слишком низкий по отношению к флебостатической оси пациента. Некалиброванная система.	Выполните проверку прямоугольной формы волны. Проверьте положение датчика. Проведите повторное обнуление. Переместите руку пациента. Примените консольную плату, чтобы поддерживать расширение в точке входа. Уберите переплет. Разожмите скрученные зажимы на линии. Удалите пузырьки воздуха/сгустки крови. Проверьте количество жидкости в промывочном пакете. Убедитесь, что давящий пакет нажат до 300 мм рт. ст.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: - Все вмешательства проводятся асептическим способом - Набор следует менять каждые 72 часа.


- Трубки не должны иметь перегибов или воздушных пузырьков. - Перед началом работы все люер- коннекторы должны быть надежно подсоединены

III. Инструкция по применению

Набор для мониторинга кровяного давления SKY Medical

закрытого типа, с датчиком с красной ручкой,
арт. BP-S00031

1 шт.

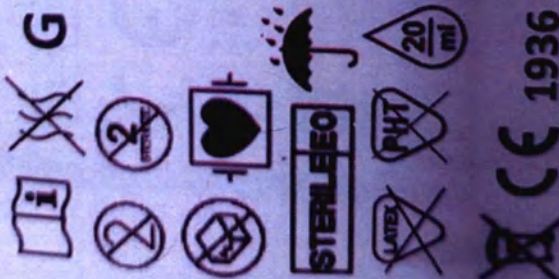

СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ! НЕТОКСИЧНО! АПИРОГЕННО!
ВНИМАНИЕ! Перед применением убедитесь в
надежности подсоединения луер-коннекторов!

REF

BP-S00031

LOT

MFT2100725



2021-06



2024-05



(01) 0 0086021 47002 2 (17) 000000 (10) XXXXXXXX

SKY Medical, a.s. (СКАЙ Медицин а.с.). Адрес: Václavská 24/2058, Šamorín, 931 01,
Slovak republic (Вичензи, 24/2058, Шаморин, 931 01, Словацкая республика), т.
+421312851700, info@med-sky.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам
полного обращения медицинских изделий: Общество с ограниченной
ответственностью «ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ», (ООО
«ИМС»), Адрес: 119002, г. Москва, ул. Малый Монпельцевский переулок, дом 4Б, этаж
1, офис 3, т. +78282283646, veronikdrg@gmail.com

Маркировка первичной (стерилизационной) потребительской упаковки

Органайзер DPT с тремя пластинами

1 шт.

REF

DO-D0003

LOT

SKB210025N



2021-06



SKY Medical, a.s. (СКАЙ Медикал а.с.), Адрес: Vápeny, 24/2058, Šamorín, 931 01, Slovakia republic (Вичензи, 24/2058, Шаморин, 931 01, Словацкая республика), т. +421312851700, info@med-sky.com
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам полного обращения медицинских изделий: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ», (ООО «ИМС»), Адрес: 119032, г. Москва, ул. Малый Мотылецкий переулок, дом 45, этаж 1, офис 3, т. +79282263040, vetonikdr@gmail.com

CE 1936

Маркировка первичной упаковки принадлежностей

Крепежное устройство для органайзера 1 шт.


REF

DO-H0000

LOT

SKB2000004N

2020-06

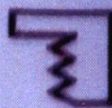

SKY Medical, a.s. (SKA) Medical a.s.), Adres: Václav, 242058, Samoil, 551 01,
Slovak republic (Беларусь, 242058, Шаворы, 551 01, Славянская республика), т.
+421312551700, info@medsky.com
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам
полного обращения медицинских изделий: Общество с ограниченной
ответственностью «ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ» (ООО
«ИМС»), Адрес: 119002, г. Москва, ул. Малый Молчаевский переулок, дом 45, этаж
1, офис 3, т. +79262263646, veronika@igsmail.com

CE 1936

Маркировка первичной упаковки принадлежностей

Набор для мониторинга давления SKY Medical с датчиком с краном с красной ручкой, арт. BP-S00001

В составе:

Линия инфузии с камерой-защелкой, длина 180 см - 1 шт., в составе: камера-защелка с колпачком - 1 шт., трубка - 1 шт., розничный зажим - 1 шт., лuer-коннектор M - 1 шт., Датчик давления, одноразовый, 3 мл/ч, с краном с красной ручкой - 1 шт., Соединительная линия, длина 125 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., лuer-коннектор M - 1 шт., лuer-коннектор F - 1 шт., колпачок - 1 шт., Кабель к процессору обработки сигналов - 1 шт., Вспомогатель с шпательными - 1 шт.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Органайзер DPT с двумя клапанами, арт. DO-D0002 - 1 шт. (при необходимости), Органайзер DPT с тремя клапанами, арт. DO-T0003 - 1 шт. (при необходимости), Кровяное устройство для органа, арт. DO-H0000 - 1 шт. (при необходимости).

ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: см. на обороте

Использованные изделия обеззараживаются и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б). Неиспользованные изделия утилизировать как отходы класса А.

Назначение:

для непрерывного инвазивного контроля Давления с помощью встроенных датчиков давления.

Меры предосторожности:

Не используйте изделие по истечении срока годности

Хранить:

в оригинальных закрытых упаковках производителя в месте, защищенном от влаги, прямых солнечных лучей при температуре 5 - 35 °C, влажности не более 80%.

SKY Medical, а.с. (СЛАВЯН Медикал а.с.), Адрес: Vojensky, 24/2058, Bratislava, 931 01, Slovak republic (Венгрия, 24/2058 Шаморин, 931 01, Словакия республика), Т. +421312651700, info@med-sky.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам полного обращения медицинских изделий. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ», (ООО «ИМС»), Адрес: 119002, г. Москва, ул. Малый Москвитинский переулок, дом 4Б, этаж 1, офис 3, т. +78002263646, info@med-sky.com

LOT			
MFT2100725	2021-06	2024-05	СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ! НЕТОКСИЧНО! АПИРОГЕННО!
SKB210025N	2021-06	-	STERILE
SKB200004N	2020-06	-	G



1 шт.

Внешний вид этикетки с маркировкой вторичной упаковки (лицевая сторона) с Инструкцией по применению (на обратной стороне)

[illegible]

Набор для мониторинга кровяного давления SKY Medical закрытого типа, с датчиком с красной ручкой, арт. ВР-S00031

В комплект:

Линия инфузии с камерой-капельницей, длина 180 см - 1 шт., в составе: камера-капельница с колпачком - 1 шт., трубка - 1 шт., роликовый держатель - 1 шт., дур-коннектор М - 1 шт. Датчик давления, одноразовый, 3 мм², с красной ручкой - 1 шт., соединительная линия, длина 30 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., дур-коннектор М - 1 шт., дур-коннектор F - 1 шт. Соединительная линия, длина 150 см - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., дур-коннектор М - 1 шт., дур-коннектор F - 1 шт. Круг 4-х хвостов с красной ручкой в безымянном колпачке - 1 шт., Шарик с красной ручкой - 1 шт., Линия мониторинга давления, длина 1,5 м - 1 шт., в составе: трубка - 1 шт., дур-коннектор М - 1 шт., дур-коннектор F - 1 шт., колпачок - 1 шт., Кабель к процессору обработки сигнала - 1 шт., Выключатель с дисплеем - 1 шт.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Органайзер ВРТ с двумя клапанами, арт.ДО-D0002 - 1 шт. (при необходимости).

Органайзер ВРТе тремя клапанами, арт.ДО-D0003 - 1 шт. (при необходимости).

Крепёжное устройство для органайзера, арт.ДО-D0000 - 1 шт. (при необходимости).

Использованные изделия обеззараживаются и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б). Неиспользованные изделия утилизировать как отходы класса А.


Назначение:

для непрерывного инвазивного контроля давления с помощью встроенных датчиков давления.

SKY Medical, a.s. (SKAI Medical a.s.), Адрес: Vojensky, 24/2058, Samotín, 931 01, Slovák republic (Винница, 24/2058, Шаморин, 931 01, Словацкая республика), Т. +421312851700, info@med-sky.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ по вопросам полного обращения медицинских изделий: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ», (ООО «ИМС»). Адрес: 119002, г. Москва, ул. Малый Мотель-дворский переулок, дом 4Б, этаж 1, офис 3, т. +792662263646, veronika@sky.com

LOT			СТЕРИЛЬНО ВНЕТРИ! НЕТОКСИЧНО! АПИРОГЕННО!
MFT200725	2021-06	2024-05	
SKS210025N	2021-06	-	
SKS200004N	2020-06	-	

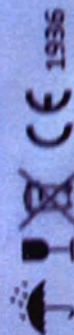

Меры предосторожности:

Не используйте изделия по истечении срока годности

Хранить

в оригинальных закрытых упаковках производителя в месте, защищенном от влаги, прямых солнечных лучей при температуре 5 - 35 °C, влажность не более 80%.

20 шт.

МАССА БРУТТО: XX кг

РУ № _____ от _____

Маркировка транспортной упаковки

Прошито и пронумеровано

30 (Тридцать)

Генеральный директор
ООО «ЦИМС»

В.С. Дрожин

