



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Канюли назальные одноразовые для высокопоточной кислородной терапии

производства компании Армстронг Медикал Лимитед, Великобритания/
Armstrong Medical Limited, United Kingdom

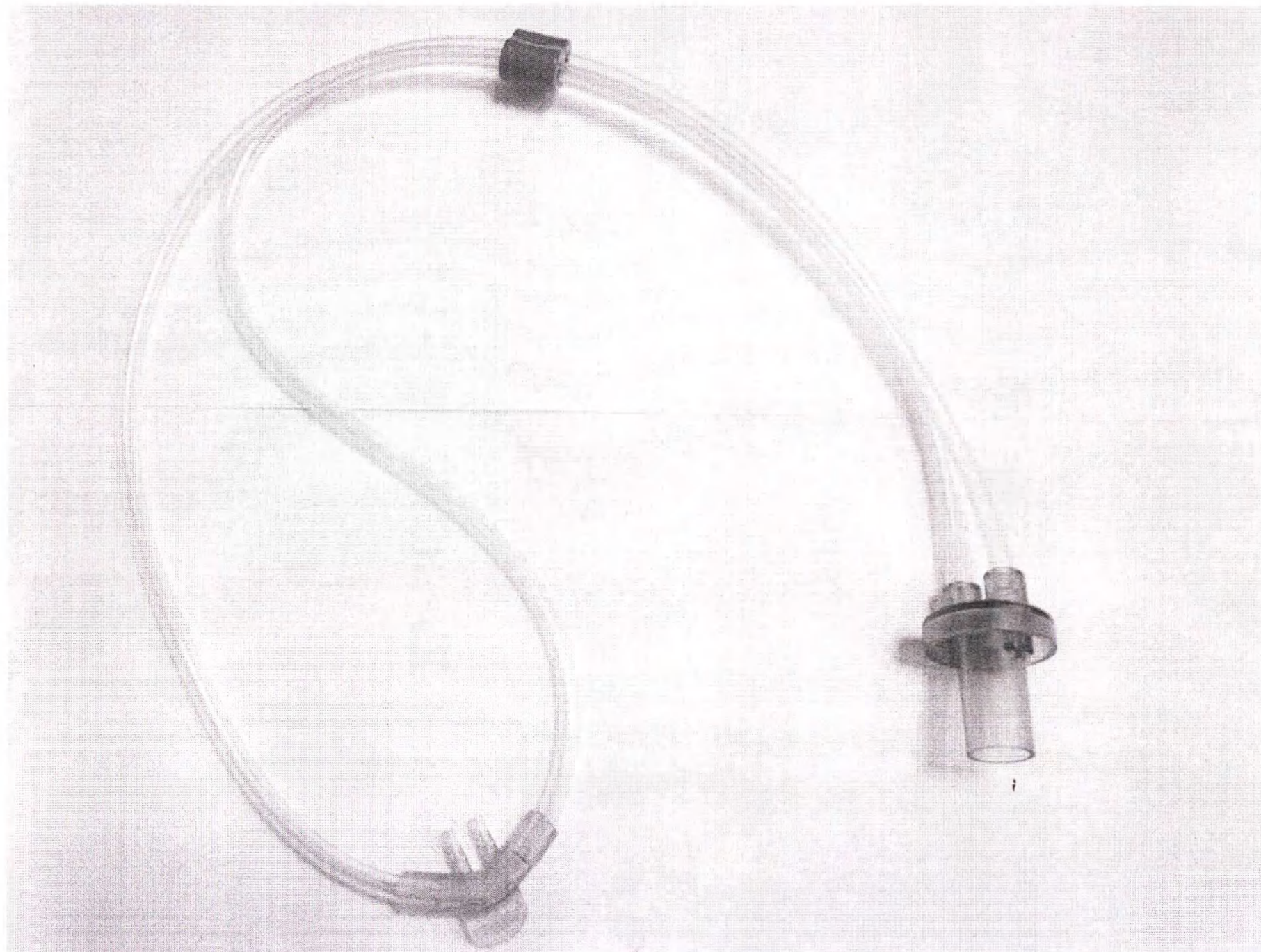

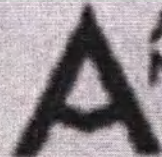

Armstrong
Medical



18330001 Business Park
Sawbridge Road
Caversham BT2 1BQ
Northern Ireland
T +44 (0)28 7038 4128
E info@armstrongmedical.net
www.armstrongmedical.net



1839




EC REP

Advent Ltd
Tower Business Centre, 2nd Fl.,
Tower Street, Swale, BN25 4DZ,
UK

Nasal Prongs

Basic nHFOT cannula, premature (1 to 8L/min.)

REF	AMNC2001	SIZE	PREMATURE
LOT	260620	2025-05	QTY 1

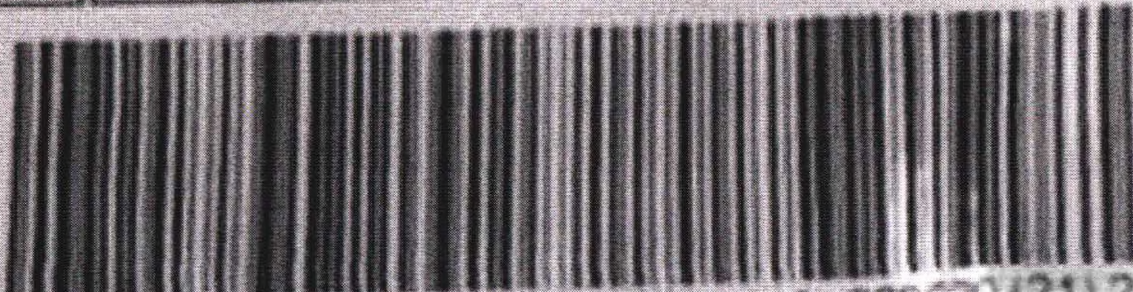

(01) 1 6059443 00319 4 (17) 250528 (10) 260620 (21) 246

ZPNCAB Issue 02

Рисунок 2. Назальная канюля Basic premature. Заводская маркировка

Наименование согласно РУ№

Канюли назальные одноразовые для
высокопоточной кислородной терапии



Назальная канюля Basic premature

REF AMNC2001

Количество 1 штука

LOT 0000000

0000 - 00

Официальный дистрибьютор
ООО "БРМ", 107031, г. Москва,
Петровский переулок 1/30, стр. 1,
(495) 629 - 44 - 70



Армстронг Медикал Лимитед, Уоттстоун Бизнес
Парк, Ньюбридж Роад, Колерзин, Северная
Ирландия BT52 1BC, Великобритания
Тел.: + 44 (0) 28 7035 6029



эл. почта: info@armstrongmedical.net

НЕ ТОКСИЧНО ВНУТРИ

Рисунок 3. Назальная канюля Basic premature. Маркировка на русском языке

Basic

Канюли назальные одноканальные для высокотоочной кислородной терапии, для использования с дыхательными контурами Armstrong Medical в отделениях реанимации, интенсивной терапии, и для амбулаторного лечения.

Перед клиническим использованием, пожалуйста

внимательно прочтите следующие рекомендации:

1. Выберите правильный размер канюли для пациента с учетом предполагаемой скорости потока газа. Не закрывайте ноздри ребенка.

2. Выберите расход газа и концентрацию кислорода, которые необходимы для достижения необходимого уровня насыщения артериальной крови кислородом (SaO2) или вымывания CO2, при сохранении комфорта пациента.

3. Подсоедините дистальный конец канюли к инспираторному концу дыхательного контура и убедитесь, что поток присутствует перед присоединением к пациенту.

4. Поместите кончики зубцов канюли в ноздри пациента, убедившись, что правый и левый зубцы расположены в правой и левой ноздрях соответственно, и убедитесь, что кончики зубцов направлены под углом вверх от губного желоба.

5. Закрепите на месте с помощью предопределенного метода фиксации (коллаком или аксессуарами лицевой фиксации). В качестве альтернативы, надените петлю на уши пациента и закрепите под подбородком.

6. Контролируйте уровень насыщения артериальной крови кислородом и пульсоксиметрию с помощью подходящего устройства стороннего производителя.

7. Данное изделие гарантировано для использования на 1 (одном) пациенте в течение максимум 7 дней с даты первоначального использования или удаления из перанальной упаковки.

8. Замените, если изделие загрязнено или повреждено.

9. За технической помощью обращайтесь в Armstrong Medical или к местному представителю.

Предупреждения:

1. Обеспечьте непрерывный мониторинг SaO2 и при необходимости отрегулируйте подачу кислорода.

2. Не использовать при потоке газа <1 л / мин.

3. Не закрывайте ротовую полость никакими устройствами, предназначенными для предотвращения или ограничения выхода/выдоха пациента.

4. При использовании этого изделия в носовой полости возможны легкие уровни CPAP на выдохе и/или выдохе (постоянное положительное давление в дыхательных путях).

5. Используйте в сочетании с дыхательным контуром с активным увлажнением для продолжительной терапии в течение часа и более. Рекомендуется использовать дыхательный контур с подогревом и увлажнением.

6. При использовании с активным увлажнением убедитесь, что увлажнитель настроен и поддерживается в «оптимальном» режиме.

7. Убедитесь, что использование прекращено через 7 дней с даты первого использования.

8. Держите упаковку закрытой до использования (риск закупорки посторонними предметами).

9. НЕ мойте, не чистите и не пытайтесь стерилизовать этот продукт.

10. Не разбирайте устройство (опасность вдыхания / проглатывания мелких деталей).

Armstrong Medical

Wallstown Business Park
Newbridge Road
Coleraine BT52 1BS
Northern Ireland

Tel: +44 (0)28 7035 8029

E-mail: info@armstrongmedical.net

Advena Ltd

Tower Business Centre, 2nd Fl.
Tower Street, Swale, BR4 4DT
Malla

EC REP

NON
STERILE

LATEX
FREE

MD

1639



Эксклюзивный представитель в
России

ООО «БРМ»


г. Москва, Петровский пер., 1/30 стр.1

www.brm-ross.ru

Канюля назальная

REF

AMNC2001

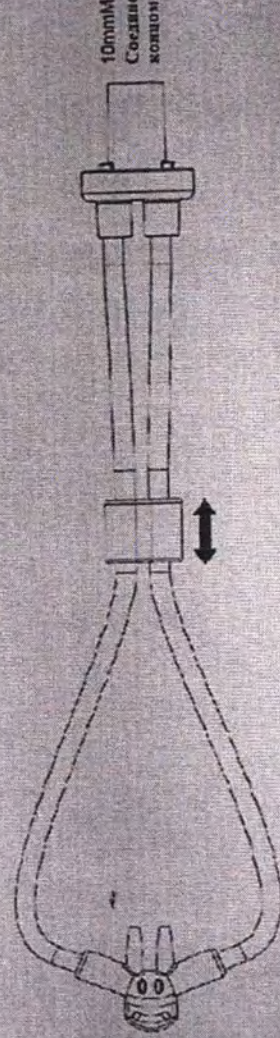

10mm

Соединение с инспираторным
концом дыхательного контура

Доступные коды продукции

AMNC2001	Basic, размер уретры (от 1 до 8 мм)	AMNC3001	Needle, размер уретры (от 1 до 8 мм, красный)
AMNC2002	Basic, размер уретры (от 1 до 8 мм)	AMNC3002	Needle, размер уретры (от 1 до 8 мм, белый)
AMNC2003	Basic, размер уретры (от 1 до 10 мм)	AMNC3003	Needle, размер уретры (от 1 до 10 мм, светло-фиолетовый)
AMNC2004	Basic, размер уретры (от 1 до 20 мм)	AMNC3004	Needle, размер уретры (от 1 до 20 мм, темно-фиолетовый)
AMNC2005	Basic, размер уретры (от 1 до 25 мм)	AMNC3005	Needle, размер уретры (от 1 до 25 мм, белый)

LOT

000000

0000-00

www.armstrongmedical.net

Рисунок 4. Макет инструкции вкладыша для Назальной канюли Basic premature.

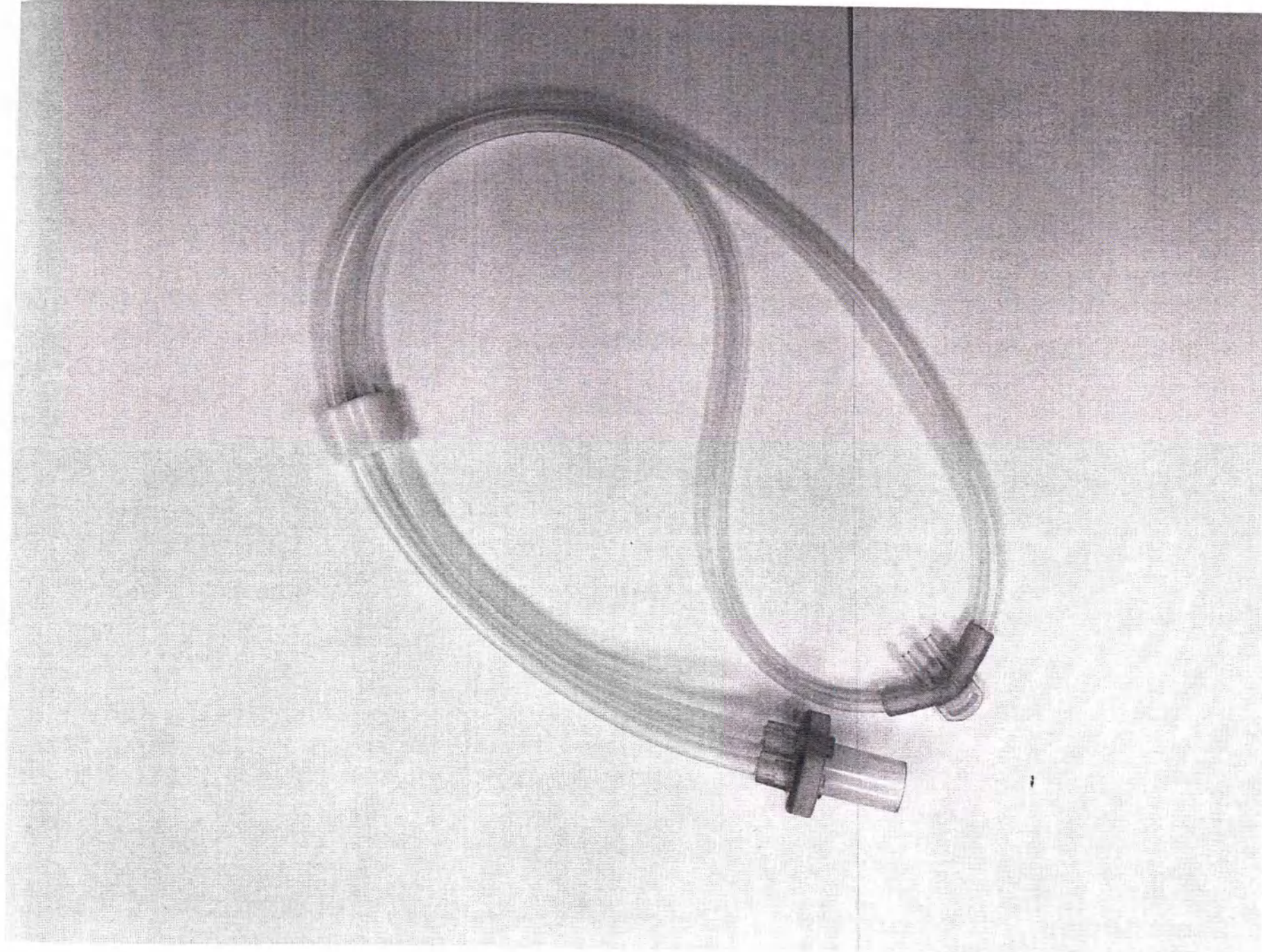


Рисунок 5. Назальная канюля Basic neonatal. Общий вид в индивидуальной упаковке



MD



Armstrong
Medical



Walsworth Business Park
Leeds Road
Dunstable BT12 1BB
Northern Ireland
T +44 (0)28 7025 4029
E info@armstrongmedical.net
www.armstrongmedical.net

CE
1639



EC REP

Advana Ltd
Tower Business Centre, 2nd Flr.
Tower Street, Banbury, OX9 4DZ,
Mkts

Nasal Prongs

Basic nHFOT cannula, neonatal (1 to 8L/min.)

REF

AMNC2002

SIZE

NEONATAL

LOT


021220



2025-11

QTY

1

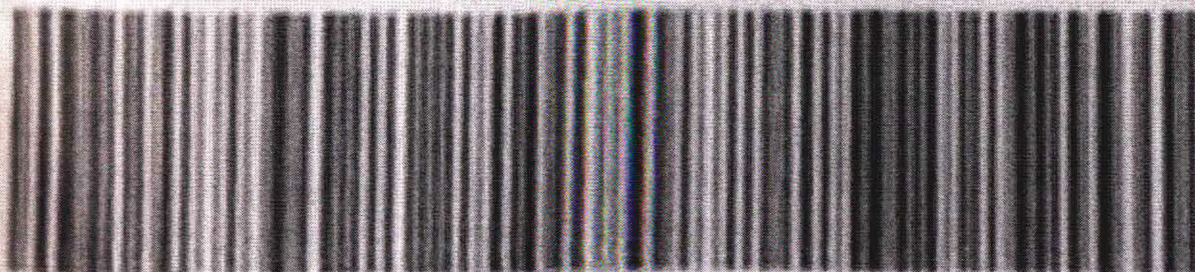

(01) 1 5059443 00320 0 (17) 251128 (10) 021220 (21) 006

AMNCAB Issue 02

Рисунок 6. Назальная канюля Basic neonatal. Заводская маркировка

Basic

Канюли назальные одноразовые для высокопоточной кислородной терапии, для использования с дыхательными контурами Armstrong Medical в отделениях реанимации, интенсивной терапии, и для амбулаторного лечения.

Перед клиническим использованием, пожалуйста внимательно прочтите следующие рекомендации:

1. Выберите правильный размер зубцов для пациента с учетом предполагаемой скорости потока газа. Не закрывайте ноздри зубцами.
2. Выберите расход газа и концентрацию кислорода, которые необходимы для достижения необходимого уровня насыщения артериальной крови кислородом (SaO2) или вымывания CO2, при сохранении комфорта пациента.
3. Подсоедините дистальный конец канюли к инспираторному концу дыхательного контура и убедитесь, что поток присутствует перед присоединением к пациенту.
4. Поместите кончики зубцов канюли в ноздри пациента, убедившись, что правый и левый зубцы расположены в правой и левой ноздрях соответственно, и убедитесь, что кончики зубцов направлены под углом вверх от губного желобка.
5. Закрепите на месте с помощью предпочтительного метода фиксации (колпаком или аксессуарами лицевой фиксации). В качестве альтернативы, наденьте петлю на уши пациента и закрепите под подбородком.
6. Контролируйте уровень насыщения артериальной крови кислородом и пульсоксиметрию с помощью подходящего устройства стороннего производителя.
7. Данное изделие гарантировано для использования на 1 (одном) пациенте в течение максимум 7 дней с даты первоначального использования или удаления из первичной упаковки.
8. Замените, если изделие загрязнено или возникла окклюзия.
9. За технической помощью обращайтесь в Armstrong Medical или к местному представителю.

Предупреждения:

1. Обеспечьте непрерывный мониторинг SaO2 и при необходимости отрегулируйте подачу кислорода.
2. Не использовать при потоке газа <1 л/мин.
3. Не закрывайте ротовую полость никакими устройствами, предназначенными для предотвращения или ограничения вдоха/выдоха пациента.
4. При использовании этого изделия в носовой полости возможны низкие уровни CPAP на входе и/или выдохе (постоянное положительное давление в дыхательных путях).
5. Используйте в сочетании с дыхательным контуром с активным увлажнением для продолжительной терапии в течение часа и более. Рекомендуется использовать дыхательный контур с подогревом и увлажнением.
6. При использовании с активным увлажнением убедитесь, что увлажнитель настроен и поддерживается в «инвазивном» режиме.
7. Убедитесь, что использование прекращено через 7 дней с даты первого использования.
8. Держите упаковку закрытой до использования (риск закупорки посторонними предметами).
9. НЕ мойте, не чистите и не пытайтесь стерилизовать этот продукт.
10. Не разбирайте устройство (опасность вдыхания / проглатывания мелких деталей).

Armstrong Medical

Wattstown Business Park
Newbridge Road
Coleraine BT52 1BS
Northern Ireland

Tel: +44 (0)28 7035 6029

E-mail: info@armstrongmedical.net

EC REP

Advena Ltd
Tower Business Centre, 2nd Flr.
Tower Street, Swale, BKR 4013
Malla



Эксклюзивный представитель в
России


ООО «БРМ»

г. Москва, Петровский пер., 1/30 стр.1
www.berner-ross.ru

Канюля назальная

REF

AMNC2002

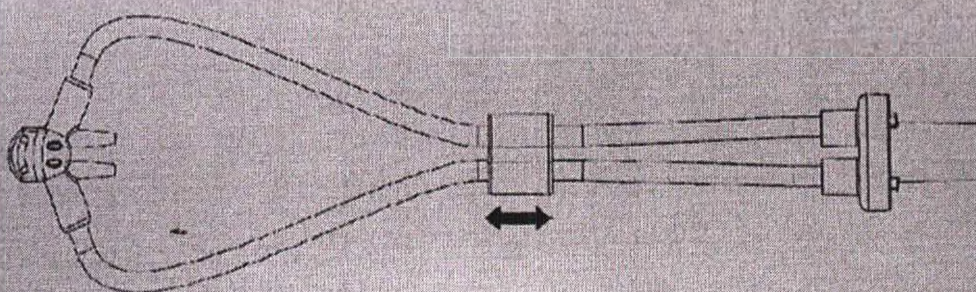

10mmM
Соединение с инспираторным
концом дыхательного контура

Доступные коды продукции

AMNC2001	Basic, размер premature (от 1 до 8 л/мин)	AMNC3001	Neoflow, размер premature (от 1 до 8 л/мин, красный)
AMNC2002	Basic, размер neonatal (от 1 до 8 л/мин)	AMNC3002	Neoflow, размер neonatal (от 1 до 8 л/мин, желтый)
AMNC2003	Basic, размер infant (от 1 до 10 л/мин)	AMNC3003	Neoflow, размер infant (от 1 до 10 л/мин, светло-фиолетовый)
AMNC2004	Basic, размер large infant (от 1 до 20 л/мин)	AMNC3004	Neoflow, размер large infant (от 1 до 20 л/мин, темно-фиолетовый)
AMNC2005	Basic, размер paediatric (от 1 до 25 л/мин)	AMNC3005	Neoflow, размер paediatric (от 1 до 25 л/мин, зеленый)

LOT 000000
0000-00

www.armstrongmedical.net




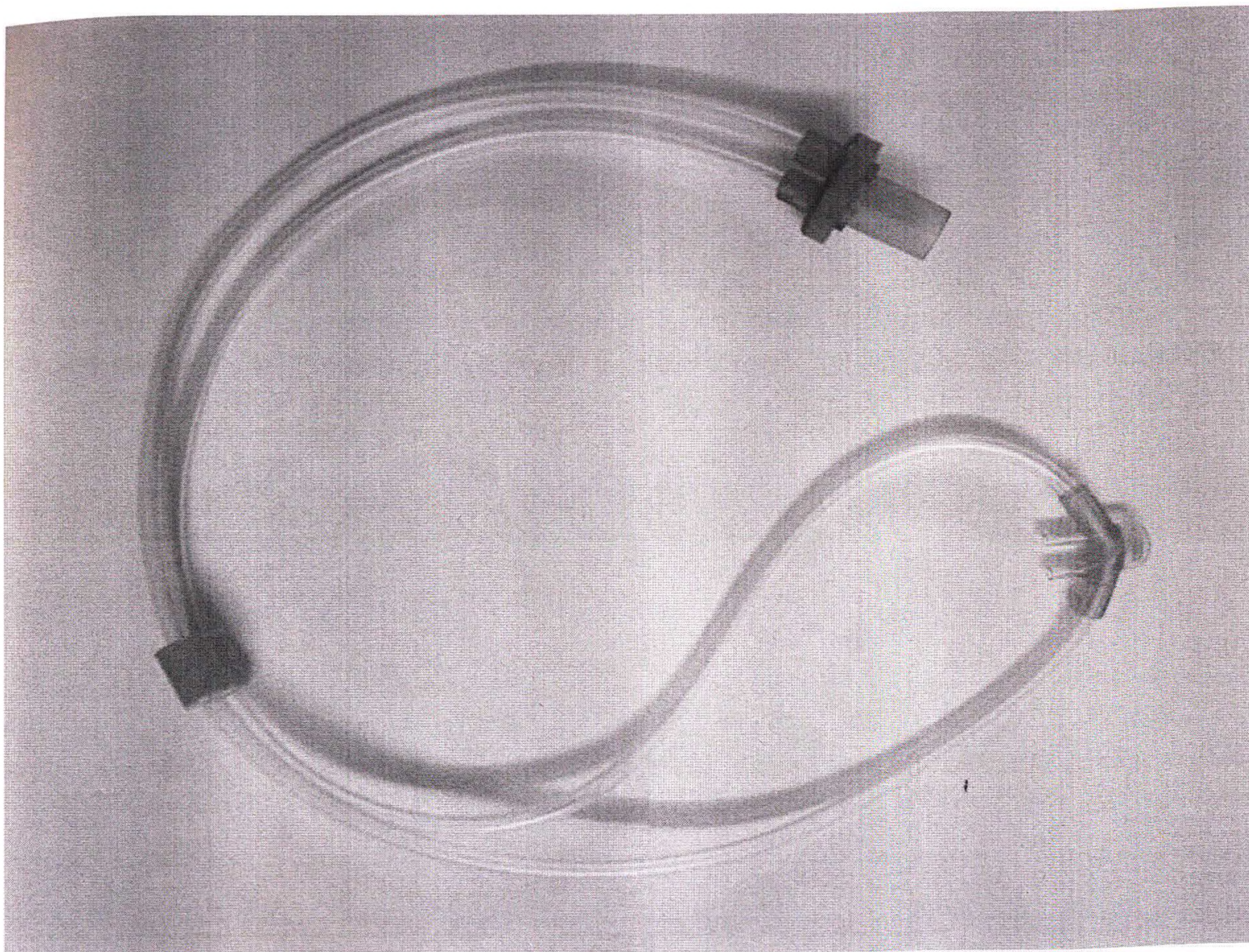


Рисунок 9. Назальная канюля Basic infant. Общий вид в индивидуальной упаковке

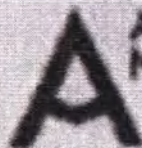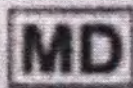

Armstrong
Medical

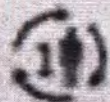

Watford Business Park
Redbridge Road
Watford WD17 1BS
United Kingdom
T: +44 (0)1923 7031 8039
E: info@armstrongmedical.com
www.armstrongmedical.net



EC REP

Advera Ltd
Tower Business Centre, 2nd Fl.
Tower Street, Gwent, NP23 5RT,
Wales

Nasal Prongs

Basic nHFOT cannula, infant (1 to 10L/min.)

REF	AMNC2003	SIZE	INFANT
LOT	260620	EXP	2025-05
		QTY	1



(01) 1 5059443 00321 7 (17) 250526 (10) 260620 (21) 109

ZPNCAB Issue 02

Наименование согласно РУ№

Канюли назальные одноразовые для
высокопоточной кислородной терапии



Назальная канюля Basic infant

REF AMNC2003

Количество 1 штука

LOT 0000000

 0000 - 00

Официальный дистрибьютор
ООО "БРМ", 107031, г. Москва,
Петровский переулок 1/30, стр. 1,
(495) 629 - 44 - 70



Армстронг Медикал Лимитед, Уоттстоун Бизнес
Парк, Ньюбридж Роад, Колерэйн, Северная
Ирландия BT52 1BC, Великобритания
Тел.: + 44 (0) 28 7035 6029
эл.почта: info@armstrongmedical.net



НЕ ТОКСИЧНО ВНУТРИ

Рисунок 11. Назальная канюля Basic infant. Маркировка на русском языке

Рисунок 12. Макет инструкции вкладыша для Назальной канюли Basic infant.

Basic

Канюли назальные одноразовые для высокоточной кислородной терапии, для использования с дыхательными контурами Armstrong Medical в отделениях реанимации, интенсивной терапии, и для амбулаторного лечения.

Перед клиническим использованием, пожалуйста внимательно прочтите следующие рекомендации:

1. Выберите правильный размер канюли для пациента с учетом предполагаемой скорости потока газа. Не закрывайте ноздри зубами.
2. Выберите расход газа и концентрацию кислорода, которые необходимы для достижения необходимого уровня насыщения артериальной крови кислородом (SaO₂) или вымывания CO₂, при сохранении комфорта пациента.
3. Подсоедините дистальный конец канюли к инспираторному контуру дыхательного контура и убедитесь, что поток присутствует перед присоединением к пациенту.
4. Поместите кончик канюли в ноздри пациента, убедившись, что кончики зубов направлены вправо и влево соответствующим образом.
5. Закрепите канюлю на месте с помощью предоплаченного метода фиксации (колпачком или аксессуаром лицевой фиксации). В качестве альтернативы, налейте те пасто на уши пациента и закрепите под подбородком.
6. Контролируйте уровень насыщения артериальной крови кислородом и пульсоксиметрию с помощью поддерживающего устройства стороннего производителя на 1 (одном) пациенте в течение максимум 7 дней с даты первоначальной установки.
7. Данное изделие гарантировано для использования на 1 (одном) пациенте в течение максимум 7 дней с даты первоначальной установки.
8. Замените, если изделие загрязнено или возникла окклюзия.
9. За технической помощью обращайтесь в Armstrong Medical или к местному представителю.


Предупреждения:

1. Обеспечьте непрерывный мониторинг SaO₂ и при необходимости отрегулируйте подачу кислорода.
2. Не использовать при потоке газа <1 л / мин.
3. Не закрывайте ротную полость никакими устройствами, предназначенными для предотвращения или ограничения вдоха/выдоха пациента.
4. При использовании этого изделия в носовой полости возможны низкие уровни CPAP на входе и/или выдохе (постоянное положительное давление в дыхательных путях).
5. Используйте в сочетании с дыхательным контуром с активным увлажнением для продолжительной терапии в течение часа и более. Рекомендуется использовать дыхательный контур с подогревом и увлажнением, что увлажнитель настроен и поддерживается в «пассивном» режиме.
7. Убедитесь, что использование прекращено через 7 дней с даты первого использования.
8. Держите упаковку закрытой до использования (риск закупорки посторонними предметами).
9. НЕ мойте, не чистите и не пытайтесь стерилизовать этот продукт.
10. Не разбирайте устройство (опасность вдыхания / проглатывания мелких деталей).

Канюля назальная

REF

AMNC2004

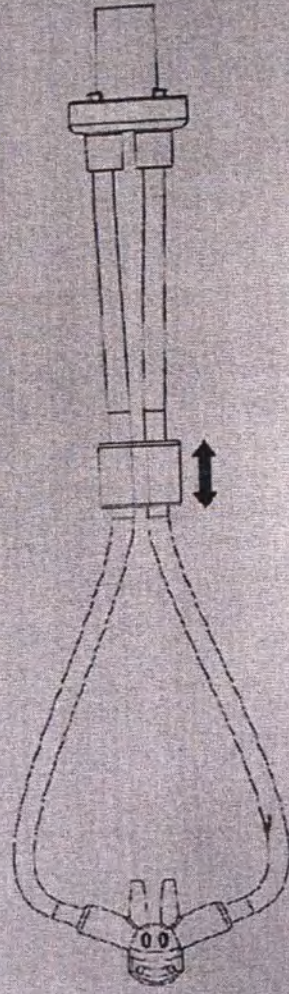

10mm

Соединение с инспираторным контуром дыхательного контура

Доступные коды продукции

AMNC2001	Basic, размер респиратора (от 1 до 8 л/мин)	AMNC3001	Needflow, размер респиратора (от 1 до 8 л/мин, красный)
AMNC2002	Basic, размер респиратора (от 1 до 8 л/мин)	AMNC3002	Needflow, размер респиратора (от 1 до 8 л/мин, желтый)
AMNC2003	Basic, размер респиратора (от 1 до 10 л/мин)	AMNC3003	Needflow, размер респиратора (от 1 до 10 л/мин, светло-фиолетовый)
AMNC2004	Basic, размер респиратора (от 1 до 20 л/мин)	AMNC3004	Needflow, размер респиратора (от 1 до 20 л/мин, темно-фиолетовый)
AMNC2005	Basic, размер респиратора (от 1 до 25 л/мин)	AMNC3005	Needflow, размер респиратора (от 1 до 25 л/мин, желтый)

www.armstrongmedical.net

LOT



000000

0000-00

Armstrong Medical

Wattstown Business Park
Newbridge Road
Coleraine BT52 1BS
Northern Ireland

Tel: +44 (0)28 7035 6029

E-mail: info@armstrongmedical.net

Advena Ltd

Tower Business Centre, 2nd Flr,
Tower Street, Swale, UKR 4013

Malta

EC REP



1639



Эксклюзивный представитель в России

ООО «БРМ»

г. Москва, Петровский пер., 1/30 стр.1

www.brmet-ross.ru

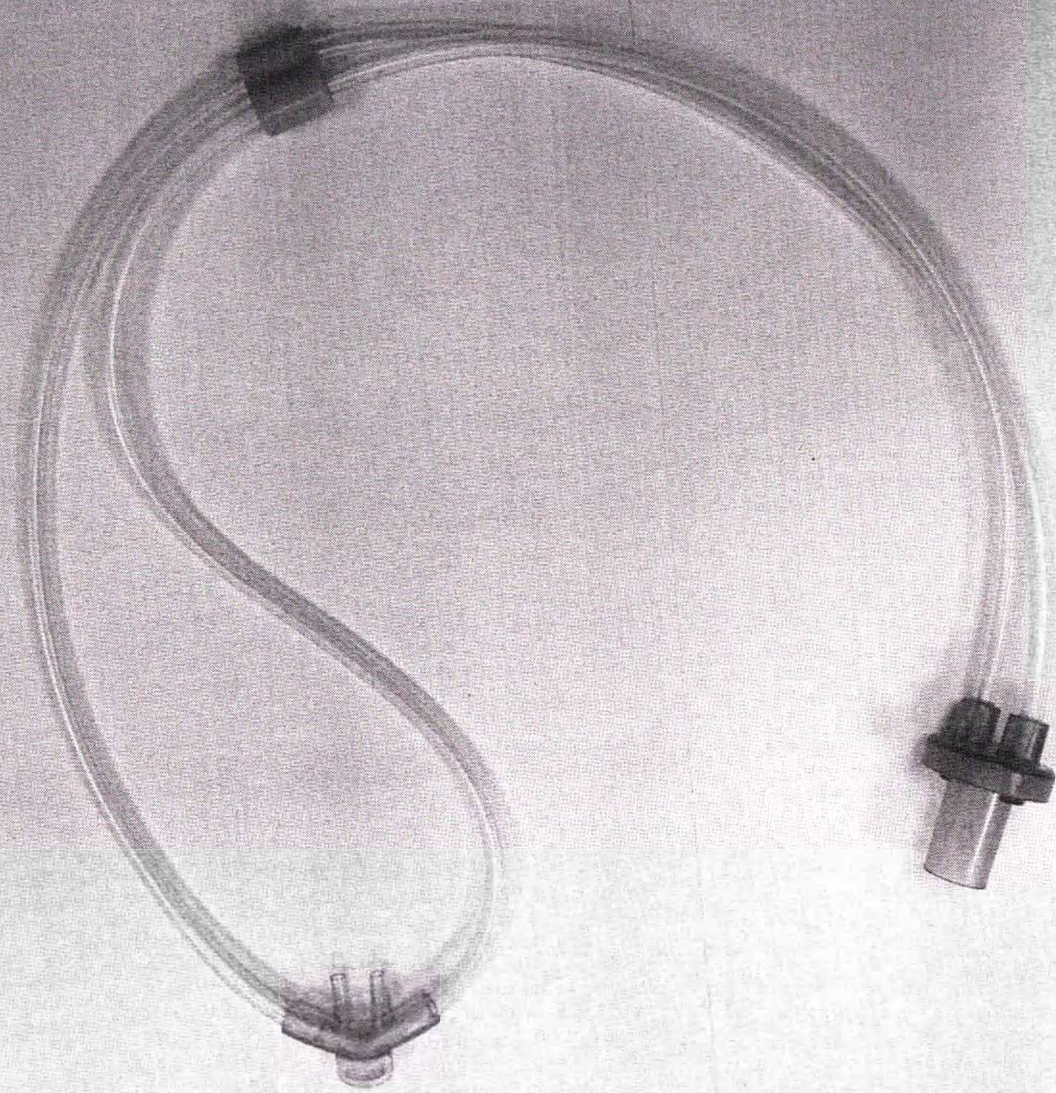



Рисунок 13. Назальная канюля Basic large infant. Общий вид в индивидуальной упаковке



Armstrong
Medical



Wattstown Business Park
Newbridge Road
Coleraine BT52 1BS
Northern Ireland
T +44 (0)28 7035 6029
E info@armstrongmedical.net
www.armstrongmedical.net

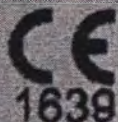

EC REP

Advana Ltd
Tower Business Centre, 2nd Flr,
Tower Street, Swatara, BKR 4013,
Malta

Nasal Prongs

Basic nHFOT cannula, large infant (1 to 20L/min.)

REF	AMNC2004	SIZE	LARGE INFANT
LOT	021019	EXP	2024-09
		QTY	1



(01) 1 5059443 00322 4 (17) 240928 (10) 021019 (21) 015

ZPNCAB Issue 02

Рисунок 14. Назальная канюля Basic large infant. Заводская маркировка

Наименование согласно РУ№

Канюли назальные одноразовые для
высокопоточной кислородной терапии



Назальная канюля Basic large infant

REF AMNC2004

Количество 1 штука

LOT 0000000

Официальный дистрибьютор:
ООО "БРМ", 107031, г. Москва,
Петровский переулок 1/30, стр. 1.
(495) 629 - 44 - 70

 0000 - 00



Армстронг Медикал Лимитед, Уоттстоун Бизнес
Парк, Ньюбридж Роад, Колерэйн, Северная
Ирландия BT52 1BC, Великобритания
Тел.: + 44 (0) 28 7035 6029



эл. почта: info@armstrongmedical.net

НЕ ТОКСИЧНО ВНУТРИ

Рисунок 15. Назальная канюля Basic large infant. Маркировка на русском языке

Basic

Канюли назальные одноканальные для высокоточной кислородной терапии, для использования с дыхательными контурами Armstrong Medical в отделениях реанимации, интенсивной терапии, и для амбулаторного лечения.

Перед клиническим использованием, пожалуйста, внимательно прочтите следующие рекомендации:

1. Выберите правильный размер зубов для пациента с учетом предполагаемой скорости потока газа. Не закрывайте ноздри зубами.
2. Выберите расход газа и концентрацию артериальной крови кислородом (SaO₂) или выдыхания CO₂ при необходимом уровне насыщения.
3. Подсоедините дистальный конец канюли к инспираторному контуру дыхательного контура и убедитесь, что поток присутствует перед присоединением к пациенту.
4. Поместите кончики зубных канюли в ноздри пациента, убедившись, что кончики зубных канюли в правой и левой ноздрях соответственно, и убедившись, что кончики зубных канюли в правой и левой ноздрях соответственно.
5. Зафиксируйте на месте с помощью предпочтительного метода фиксации (колпачком или аксессуарами липцевой фиксации). В качестве альтернативы, наденьте петлю на уши пациента и закрепите под подбородком.
6. Контролируйте уровень насыщения артериальной кровью кислородом и пульсоксиметрию с помощью подходящего устройства.
7. Данное изделие предназначено для использования на 1 (одном) пациенте в течение максимум 7 дней с даты первоначального использования или удаления из перинатальной упаковки.
8. Замените, если изделие загрязнено или повреждено или возникла окклюзия.
9. За технической помощью обращайтесь в Armstrong Medical или к местному представителю.


Предупреждения:

1. Обеспечьте непрерывный мониторинг SaO₂ и при необходимости отрегулируйте подачу кислорода.
2. Не использовать при потоке газа <1 л / мин.
3. Не закрывайте ротовую полость, механическими устройствами, предназначенными для предотвращения или ограничения вдоха/выдоха пациента.
4. При использовании этого изделия в носовой полости возможны низкие уровни CPAP на выходе из/или выдохе (постоянное положительное давление в дыхательных путях).
5. Используйте в сочетании с дыхательным контуром с активным увлажнением для продолжительной терапии в течение часа и более. Рекомендуется использовать дыхательный контур с подогревом и увлажнением.
6. При использовании с активным увлажнением убедитесь, что увлажнитель настроен и поддерживается в «инициальном» режиме.
7. Убедитесь, что использование прекращено через 7 дней с даты первого использования.
8. Держите упаковку закрытой до использования (риск закупорки посторонними предметами).
9. НЕ мойте, не чистите и не пытайтесь стерилизовать этот продукт.
10. Не разбирайте устройство (опасность вдыхания / проглатывания мелких деталей).

Канюля назальная

REF

AMNC2004

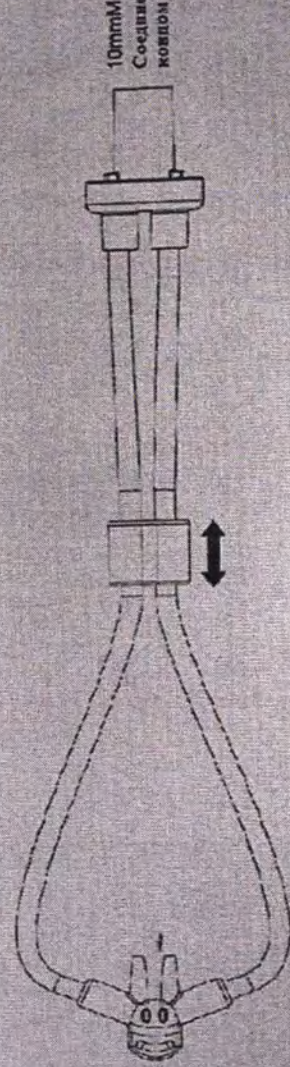

Доступные коды продукции

AMNC2001	Basic, размер детали (от 1 до 8 л/мин)	AMNC3001	Needlow, размер детали (от 1 до 8 л/мин, кристалл)
AMNC2002	Basic, размер детали (от 1 до 8 л/мин)	AMNC3002	Needlow, размер детали (от 1 до 8 л/мин, металл)
AMNC2003	Basic, размер infant (от 1 до 10 л/мин)	AMNC3003	Needlow, размер infant (от 1 до 10 л/мин, металл)
AMNC2004	Basic, размер large infant (от 1 до 20 л/мин)	AMNC3004	Needlow, размер large infant (от 1 до 20 л/мин, титан-флюидотакс)
AMNC2005	Basic, размер pediatric (от 1 до 25 л/мин)	AMNC3005	Needlow, размер pediatric (от 1 до 25 л/мин, металл)

www.armstrongmedical.net

LOT



000000

0000-00

Armstrong Medical



Wattstown Business Park
Newbridge Road
Coleraine BT52 1BS
Northern Ireland

Tel: +44 (0)28 7035 6029

E-mail: info@armstrongmedical.net

Advena Ltd

Tower Business Centre, 2nd Flr,
Tower Street, Swale, BN1 4013
Malla

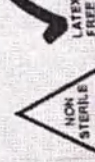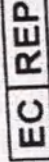

Эксклюзивный представитель в
России

ООО «БРМ»

г. Москва, Петровский пер., 1/30 стр.1

www.brm-ross.ru

Рисунок 16. Макет инструкции вкладыша для Назальной канюли Basic large infant.


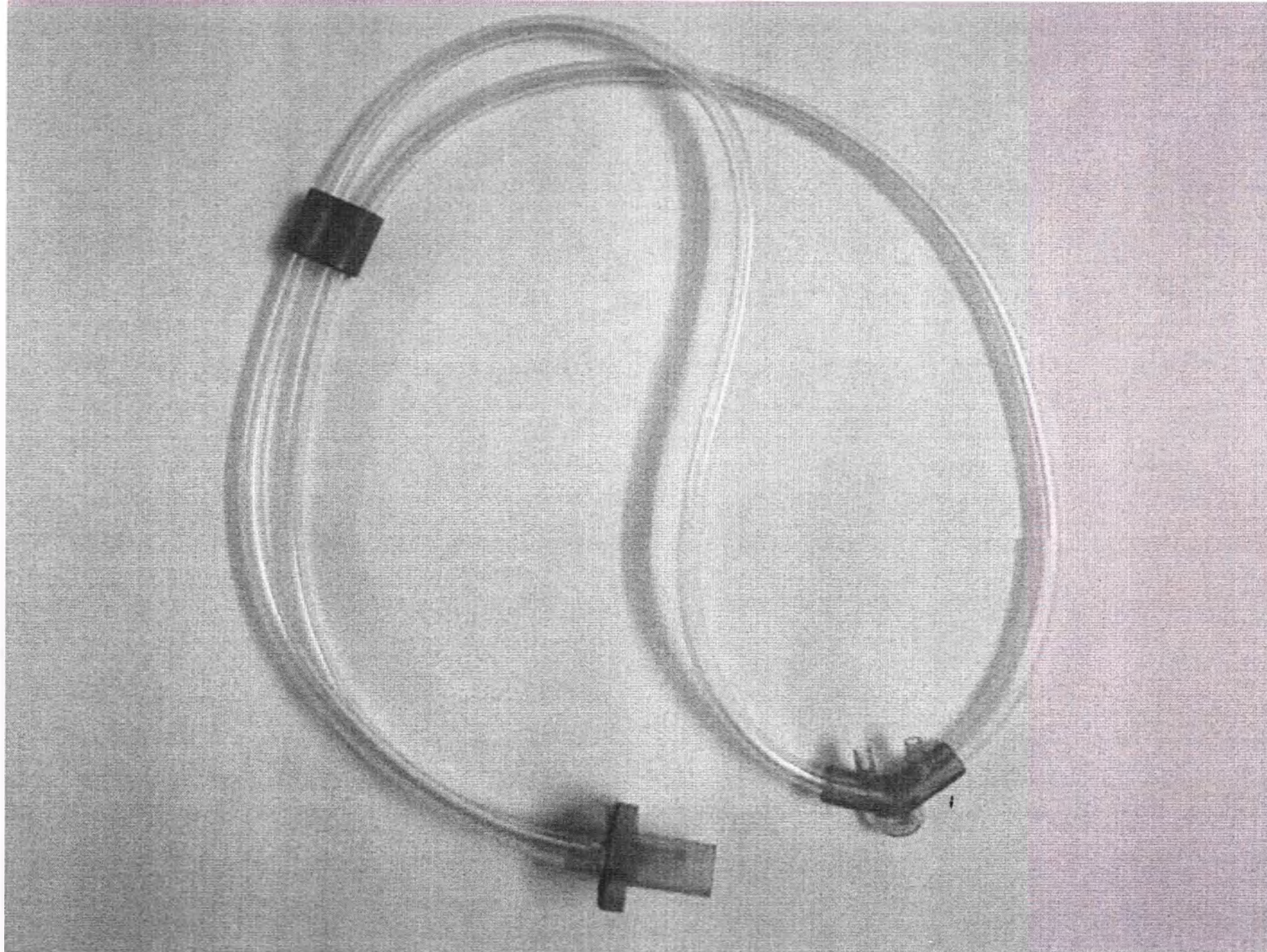


Рисунок 17. Назальная канюля Basic pediatric. Общий вид в индивидуальной упаковке



A Armstrong Medical

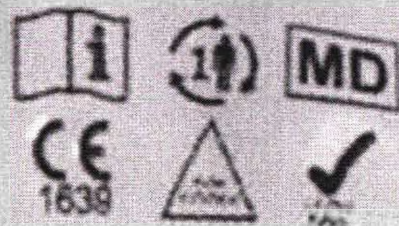

Waterdown Business Park
Newbridge Road
Coburnia BT32 1BS
Northern Ireland
T: +44 (0)28 3025 4029
E: info@armstrongmedical.net
www.armstrongmedical.net

EC REP

Advana Ltd
Tower Business Centre, 2nd Fl.
Tower Street, Booter, BKT 4013,
Malta

Nasal Prongs

Basic nHFOT cannula, paediatric (1 to 25L/min.)

REF	AMNC2005	SIZE	PAEDIATRIC
LOT	300620	2025-05	QTY 1




(01) 1 5059443 00323 1 (17) 250528 (10) 300620 (21) 594

ZPNCAB Issue 02

Рисунок 18. Назальная канюля Basic pediatric. Заводская маркировка

Наименование согласно РУ№

Канюли назальные одноразовые для
высокопоточной кислородной терапии

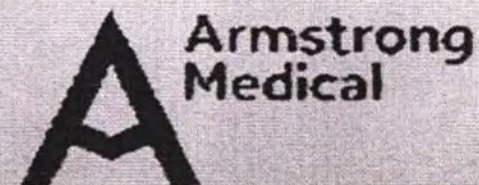

Назальная канюля Basic pediatric

REF AMNC2005

Количество 1 штука

LOT 0000000

Официальный дистрибьютор:
ООО "БРМ", 107031, г. Москва,
Петровский переулок 1/30, стр. 1,
(495) 629 - 44 - 70

 0000 - 00



Армстронг Медикал Лимитед, Уоттстоун Бизнес
Парк, Ньюбридж Роад, Колерэйн, Северная
Ирландия BT52 1BC, Великобритания
Тел.: + 44 (0) 28 7035 6029
эл.почта: info@armstrongmedical.net



НЕ ТОКСИЧНО ВНУТРИ

Рисунок 19. Назальная канюля Basic pediatric. Маркировка на русском языке

Basic

Канюли назальные одноразовые для высокоточной кислородной терапии, для использования с дыхательными контурами Armstrong Medical в отделениях реанимации, интенсивной терапии, и для амбулаторного лечения.

Перед клиническим использованием, пожалуйста внимательно прочтите следующие рекомендации:

1. Выберите правильный размер зубцов для пациента с учетом предполагаемой скорости потока газа. Не закрывайте ноздри зубцами.
2. Выберите расход газа и концентрацию кислорода (SaO₂) или выдыхания CO₂, при необходимом уровне насыщения артериальной крови кислородом и пульсоксиметрии с сохранением комфорта пациента.
3. Подсоедините дистальный конец канюли к инспираторному концу дыхательного контура и убедитесь, что поток присутствует перед присоединением к пациенту.
4. Поместите кончики зубцов канюли в ноздри пациента, убедившись, что правый и левый зубцы расположены в правой и левой ноздрях соответственно, и убедитесь, что кончики зубцов направлены вправо и влево от губного желоба.
5. Закрепите на месте с помощью предпочтительного метода фиксации (коллажом или зажимом под подбородком).
6. Контролируйте уровень насыщения артериальной крови кислородом и пульсоксиметрию с помощью подходящего устройства стороннего производителя.
7. Данное изделие гарантировано для использования на 1 (одном) пациенте в течение максимум 7 дней с даты первоначального использования или удаление из первичной упаковки.
8. Замените, если изделие контаминировано или возникла окклюзия.
9. За технической помощью обращайтесь в Armstrong Medical или к местному представителю.


Предупреждения:

1. Обеспечьте непрерывный мониторинг SaO₂ и при необходимости отрегулируйте подачу кислорода.
2. Не использовать при потоке газа <1 л / мин.
3. Не закрывайте ротную полость никакими устройствами, предназначенными для предотвращения или ограничения вдоха/выдоха пациента.
4. При использовании этого изделия в носовой полости возможны низкие уровни CPAP на вдохе и/или выдохе (постоянное положительное давление в дыхательных путях).
5. Используйте в сочетании с дыхательным контуром с активным увлажнением для продолжительной терапии в течение часа и более. Рекомендуется использовать дыхательный контур с подогревом и увлажнением.
6. При использовании с активным увлажнением убедитесь, что увлажнитель настроен и поддерживается в инкубационном режиме.
7. Убедитесь, что использование прекращено через 7 дней с даты первого использования.
8. Держите упаковку закрытой до использования (риск закупорки посторонними предметами).
9. НЕ мойте, не чистите и не пытайтесь стерилизовать этот продукт.
10. Не разбирайте устройство (опасность вдыхания / проглатывания мелких деталей).

Канюля назальная

REF

AMNC2005

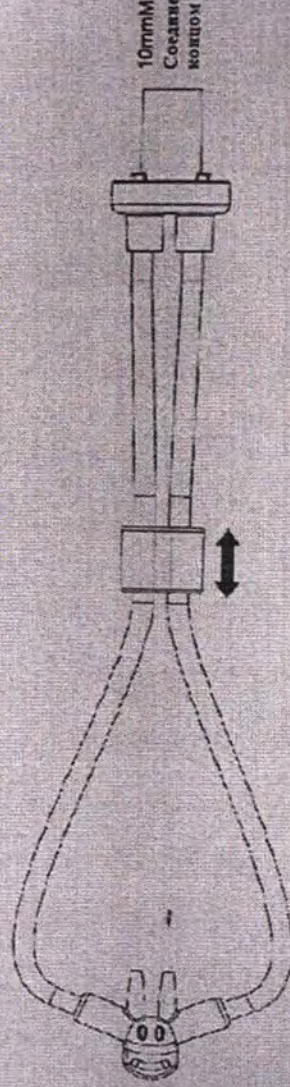

Доступные коды продукции

AMNC2001	Basic, размер резинки (от 1 до 8 мм)	AMNC3001	Needle, размер иглы (от 1 до 8 мм, красный)
AMNC2002	Basic, размер резинки (от 1 до 8 мм)	AMNC3002	Needle, размер иглы (от 1 до 8 мм, желтый)
AMNC2003	Basic, размер иглы (от 1 до 10 мм)	AMNC3003	Needle, размер иглы (от 1 до 10 мм, светло-голубой)
AMNC2004	Basic, размер иглы (от 1 до 20 мм)	AMNC3004	Needle, размер иглы (от 1 до 20 мм, темно-голубой)
AMNC2005	Basic, размер резинки (от 1 до 25 мм)	AMNC3005	Needle, размер иглы (от 1 до 25 мм, зеленый)

www.armstrongmedical.net

Armstrong Medical

Wattstown Business Park
Newbridge Road
Coleraine BT52 1BS
Northern Ireland

Tel: +44 (0)28 7035 6029

E-mail: info@armstrongmedical.net

Advena Ltd

Tower Business Centre, 2nd Fl,
Tower Street, Swale, BR4 4013
Malta

EC REP



MD CE 1639



Эксклюзивный представитель в
России

ООО «БРМ»

г. Москва, Петровский пер., 1/30 стр.1

www.brm-gross.ru

Рисунок 20. Макет инструкции вкладыша для Назальной канюли Basic pediatric.

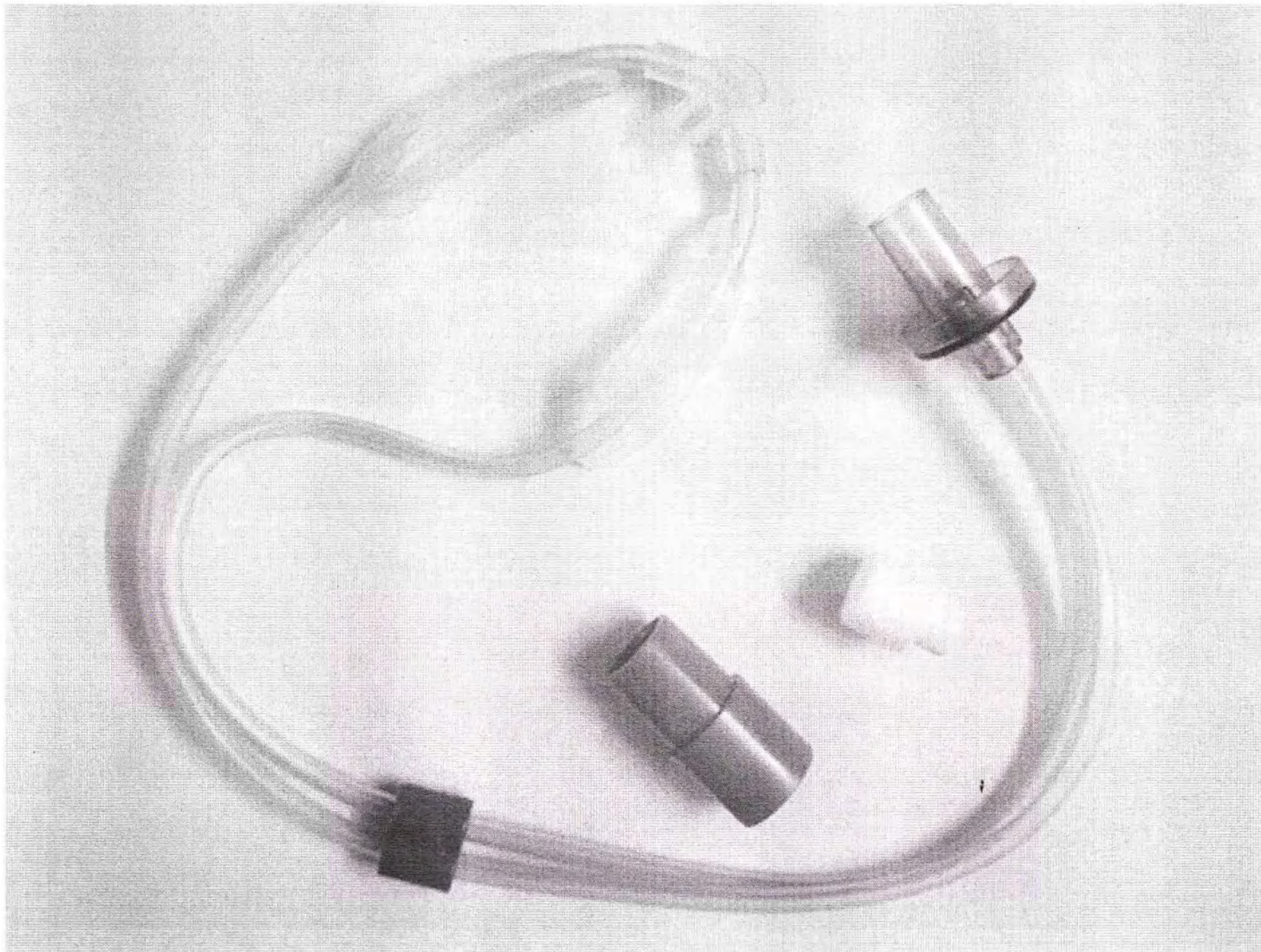


Рисунок 21. Назальная канюля NeoFlow premature. Общий вид в индивидуальной упаковке



Armstrong
Medical



Wallsdown Business Park
Newbridge Road
Coleraine BT52 1BS
Northern Ireland
T + 44 (0)28 7035 6029
E info@armstrongmedical.net
www.armstrongmedical.net




EC REP

Advena Ltd
Tower Business Centre, 2nd Flr,
Tower Street, Swatar, BKR 4013,
Malta

Nasal Prongs

Neoflow nHFOT cannula, premature (1 to 8L/min. RED)

REF	AMNC3001	SIZE	PREMATURE
LOT	161020	2025-09	QTY 1

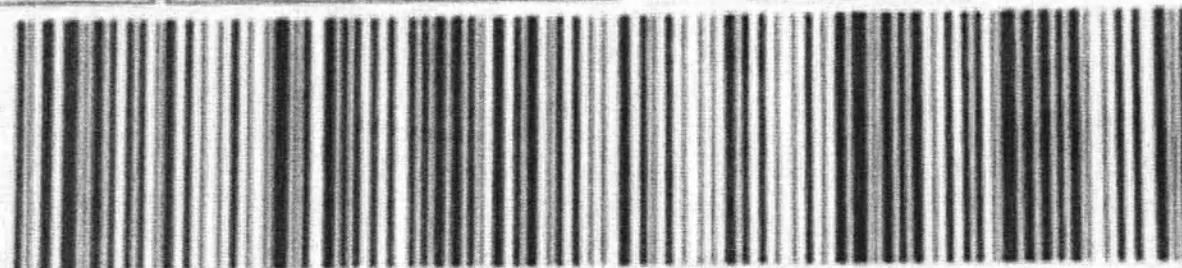


(01) 1 5059443 00324 8 (17) 250928 (10) 161020 (21) 017

ZPNC Issue 02

Рисунок 22. Назальная канюля NeoFlow premature. Заводская маркировка

Наименование согласно РУ№

Канюли назальные одноразовые для
высокопоточной кислородной терапии

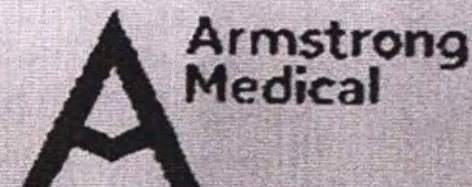

Назальная канюля NeoFlow premature

REF AMNC3001

Количество 1 штука

LOT 0000000

Официальный дистрибьютор:
ООО "БРМ", 107031, г. Москва,
Петровский переулок 1/30, стр. 1,
(495) 629 - 44 - 70

 0000 - 00



Армстронг Медикал Лимитед, Уоттстоун Бизнес
Парк, Ньюбридж Роад, Колерэйн, Северная
Ирландия BT52 1BC, Великобритания
Тел...: + 44 (0) 28 7035 6029



эл. почта: info@armstrongmedical.net

НЕ ТОКСИЧНО ВНУТРИ

Рисунок 23. Назальная канюля NeoFlow premature. Маркировка на русском языке

NeoFlow

Канюли назальные одноразовые для высокопоточной кислородной терапии, для использования с дыхательными контурами Armstrong Medical в отделениях реанимации, интенсивной терапии, и для амбулаторного лечения.

Перед клиническим использованием, пожалуйста внимательно прочтите следующие рекомендации:

1. Выберите правильный размер зубцов для пациента с учетом предполагаемой скорости потока газа. Не закрывайте ноздри зубцами.
2. Выберите расход газа и концентрацию кислорода, которые необходимы для достижения необходимого уровня насыщения артериальной крови кислородом (SaO2) или вымывания CO2, при сохранении комфорта пациента.
3. Подсоедините дистальный конец канюли к инспираторному концу дыхательного контура и убедитесь, что поток присутствует перед присоединением к пациенту.
4. Поместите кончики зубцов канюли в ноздри пациента, убедившись, что правый и левый зубцы расположены в правой и левой ноздрях соответственно, и убедитесь, что кончики зубцов направлены под углом вверх от губного желобка.
5. Закрепите на месте с помощью предпочтительного метода фиксации (колпачком или аксессуарами лицевой фиксации). В качестве альтернативы, наденьте петлю на уши пациента и закрепите под подбородком.
6. Контролируйте уровень насыщения артериальной крови кислородом и пульсоксиметрию с помощью подходящего устройства стороннего производителя.
7. Данное изделие гарантировано для использования на 1 (одном) пациенте в течение максимум 7 дней с даты первоначального использования или удаления из первичной упаковки.
8. Замените, если изделие загрязнено или возникла окклюзия.
9. За технической помощью обращайтесь в Armstrong Medical или к местному представителю.

Предупреждения:


1. Обеспечьте непрерывный мониторинг SaO2 и при необходимости отрегулируйте подачу кислорода.
2. Не использовать при потоке газа <1 л / мин.
3. Не закрывайте ротовую полость никакими устройствами, предназначенными для предотвращения или ограничения вдоха/выдоха пациента.
4. При использовании этого изделия в носовой полости возможны низкие уровни CPAP на вдохе и/или выдохе (постоянное положительное давление в дыхательных путях).
5. Используйте в сочетании с дыхательным контуром с активным увлажнением для продолжительной терапии в течении часа и более. Рекомендуется использовать дыхательный контур с подогревом и увлажнением.
6. При использовании с активным увлажнением убедитесь, что увлажнитель настроен и поддерживается в «инвазивном» режиме.
7. Убедитесь, что использование прекращено через 7 дней с даты первого использования.
8. Держите упаковку закрытой до использования (риск закупорки посторонними предметами).
9. НЕ мойте, не чистите и не пытайтесь стерилизовать этот продукт.
10. Не разбирайте устройство (опасность вдыхания / проглатывания мелких деталей).



Wattstown Business Park
Newbridge Road
Coleraine BT52 1BS
Northern Ireland

Tel: +44 (0)28 7035 6029

E-mail: info@armstrongmedical.net

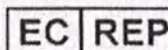

Advena Ltd
Tower Business Centre, 2nd Flr,
Tower Street, Swatara, BKR 4013
Malta



Эксклюзивный представитель в
России

ООО «БРМ»


г. Москва, Петровский пер., 1/30 стр.1

www.berner-ross.ru

Канюля назальная

REF

AMNC3001

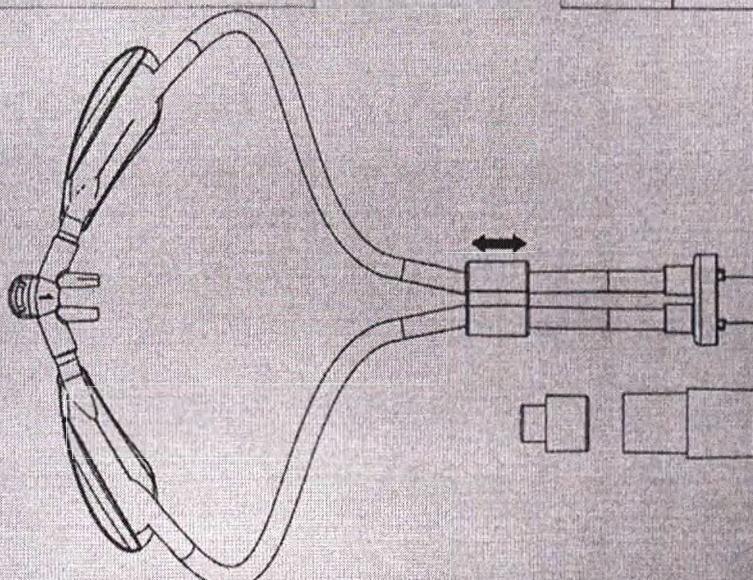

10mmM
Соединение с инспираторным
концом дыхательного контура

Доступные коды продукции

AMNC2001	Basic, размер premature (от 1 до 8 л/мин)	AMNC3001	NeoFlow, размер premature (от 1 до 8 л/мин, красный)
AMNC2002	Basic, размер neonatal (от 1 до 8 л/мин)	AMNC3002	NeoFlow, размер neonatal (от 1 до 8 л/мин, желтый)
AMNC2003	Basic, размер infant (от 1 до 10 л/мин)	AMNC3003	NeoFlow, размер infant (от 1 до 10 л/мин, светло-фиолетовый)
AMNC2004	Basic, размер large infant (от 1 до 20 л/мин)	AMNC3004	NeoFlow, размер large infant (от 1 до 20 л/мин, темно-фиолетовый)
AMNC2005	Basic, размер paediatric (от 1 до 25 л/мин)	AMNC3005	NeoFlow, размер paediatric (от 1 до 25 л/мин, зеленый)

LOT

000000



0000-00

www.armstrongmedical.net

Рисунок 24. Макет инструкции вкладыша для Назальной канюли NeoFlow premature

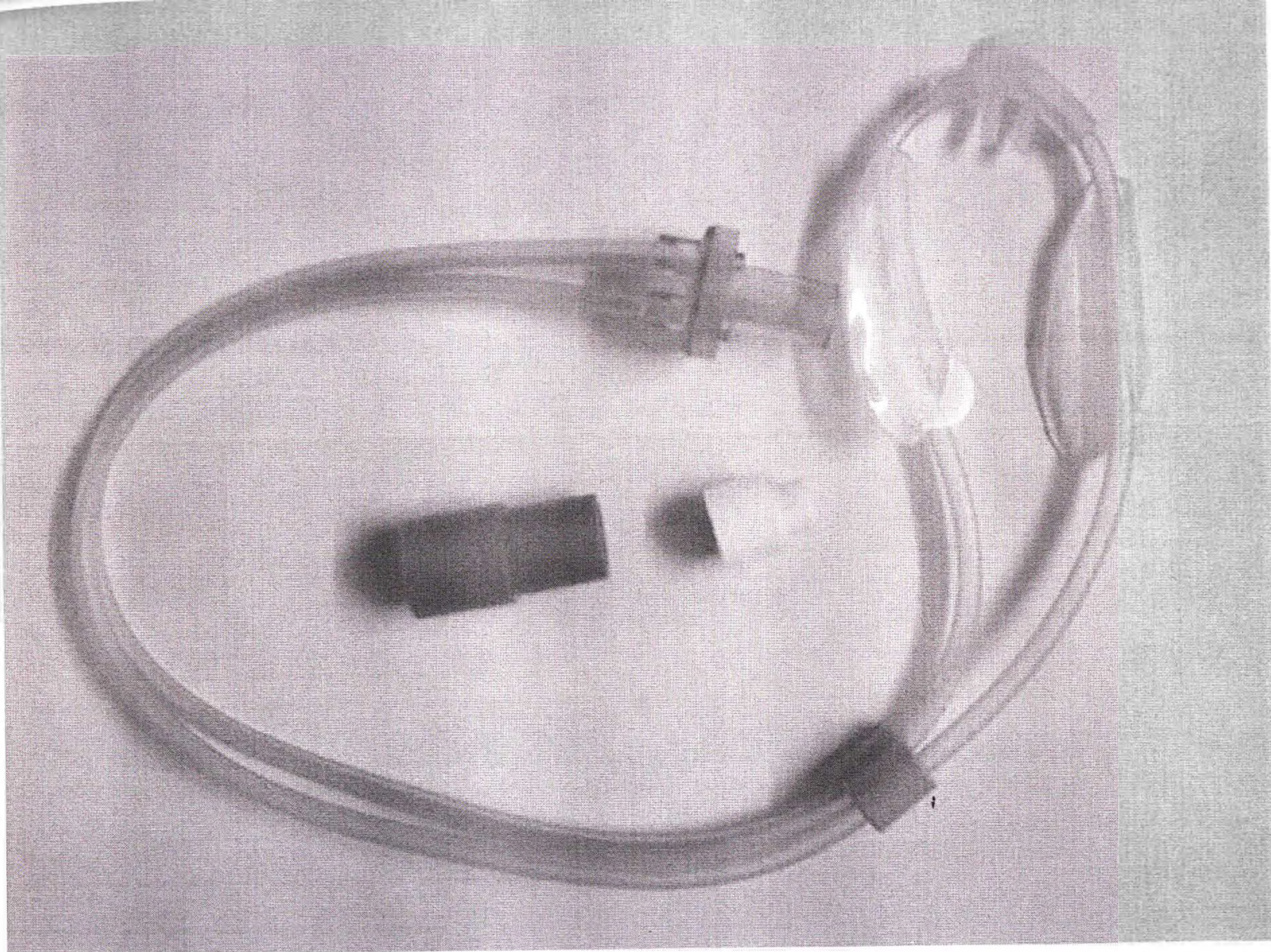


Рисунок 25. Назальная канюля NeoFlow neonatal. Общий вид в индивидуальной упаковке








Armstrong Medical

Walslow Business Park
Newbridge Rd
Coleraine BT27 8B3
Northern Ireland
+44 (0)28 7055 8129
E: info@armstrongmedical.net
www.armstrongmedical.net

EC REP

Advera Ltd
Tower Business Centre, 2nd Flr,
Tower Street, Gwent, NP23 5Q3,
Malta

Nasal Prongs

NeoFlow nHFOT cannula neonatal (1 to 8L/min. YELLOW)

REF	AMNC3002	SIZE	NEONATAL
LOT	120121	2025-12	QTY 1



(01) 1 5059443 00325 5 (17) 251228 (10) 120121 (21),001

ZPNC 15540 02

Рисунок 26. Назальная канюля NeoFlow neonatal. Заводская маркировка

Наименование согласно РУ№

Канюли назальные одноразовые для
высокопоточной кислородной терапии



Назальная канюля NeoFlow neonatal

REF AMNC3002

Количество 1 штука

LOT 0000000


Официальный дистрибьютор
ООО "БРМ", 107031, г. Москва,
Петровский переулок 1/30, стр. 1
(495) 629 - 44 - 70

 0000 - 00



Армстронг Медикал Лимитед, Уоттстоун Бизнес
Парк, Ньюбридж Роад, Колерэйн, Северная
Ирландия BT52 1BC, Великобритания
Тел.: + 44 (0) 28 7035 6029

эл.почта: info@armstrongmedical.net

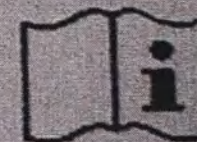

НЕ ТОКСИЧНО ВНУТРИ

Рисунок 27. Назальная канюля NeoFlow neonatal. Маркировка на русском языке

NeoFlow

Канюли назальные одноразовые для высокотоочной кислородной терапии, для использования с дыхательными контурами Armstrong Medical в отделениях реанимации, интенсивной терапии, и для амбулаторного лечения.

Перед клиническим использованием, пожалуйста внимательно прочтите следующие рекомендации:

1. Выберите правильный размер трубок для пациента с учетом предполагаемой скорости потока газа. Не закрывайте ноздри трубками.
2. Выберите расход газа и концентрацию кислорода, которые необходимы для достижения необходимого уровня насыщения артериальной крови кислородом (SaO2) или вымывания CO2, при сохранении комфорта пациента.
3. Подсоедините дистальный конец канюли к инспираторному концу дыхательного контура и убедитесь, что поток присутствует перед присоединением к пациенту.
4. Поместите кончики трубок канюли в ноздри пациента, убедившись, что правый и левый зубцы расположены в правой и левой ноздрях соответственно, и убедитесь, что кончики трубок направлены под углом вверх от губного желобка.
5. Закрепите на месте с помощью предпочтительного метода фиксации (колпаком или аксессуарами лицевой фиксации). В качестве альтернативы, наденьте петлю на уши пациента и закрепите под подбородком.
6. Контролируйте уровень насыщения артериальной крови кислородом и пульсоксиметрию с помощью подходящего устройства стороннего производителя.
7. Данное изделие гарантировано для использования на 1 (одном) пациенте в течение максимум 7 дней с даты первоначального использования или удаления из первоначальной упаковки.
8. Замените, если изделие контаминировано или возникла окклюзия.
9. За технической помощью обращайтесь в Armstrong Medical или к местному представителю.

Предупреждения:

1. Обеспечьте непрерывный мониторинг SaO2 и при необходимости отрегулируйте подачу кислорода.
2. Не использовать при потоке газа <1 л / мин.
3. Не закрывайте ротовую полость никакими устройствами, предназначенными для предотвращения или ограничения вдоха/выдоха пациента.
4. При использовании этого изделия в носовой полости возможны низкие уровни CPAP на вдохе и/или выдохе (постоянное положительное давление в дыхательных путях).
5. Используйте в сочетании с дыхательным контуром с активным увлажнением для продолжительной терапии в течение часа и более. Рекомендуется использовать дыхательный контур с подогревом и увлажнением.
6. При использовании с активным увлажнением убедитесь, что увлажнитель настроен и поддерживается в «инвазивном» режиме.
7. Убедитесь, что использование прекращено через 7 дней с даты первого использования.
8. Держите упаковку закрытой до использования (риск закупорки посторонними предметами).
9. НЕ мойте, не чистите и не пытайтесь стерилизовать этот продукт.
10. Не разбирайте устройство (опасность вдыхания / проглатывания мелких деталей).



Wattstown Business Park
Newbridge Road
Coleraine BT52 1BS
Northern Ireland

Tel: +44 (0)28 7035 6029

E-mail: info@armstrongmedical.net



Advena Ltd
Tower Business Centre, 2nd Flr.
Tower Street, Swatara, BKR 4013
Malta



Эксклюзивный представитель в
России

ООО «БРМ»


г. Москва, Петровский пер., 1/30 стр.1

www.berner-ross.ru

Канюля назальная

REF

AMNC3002

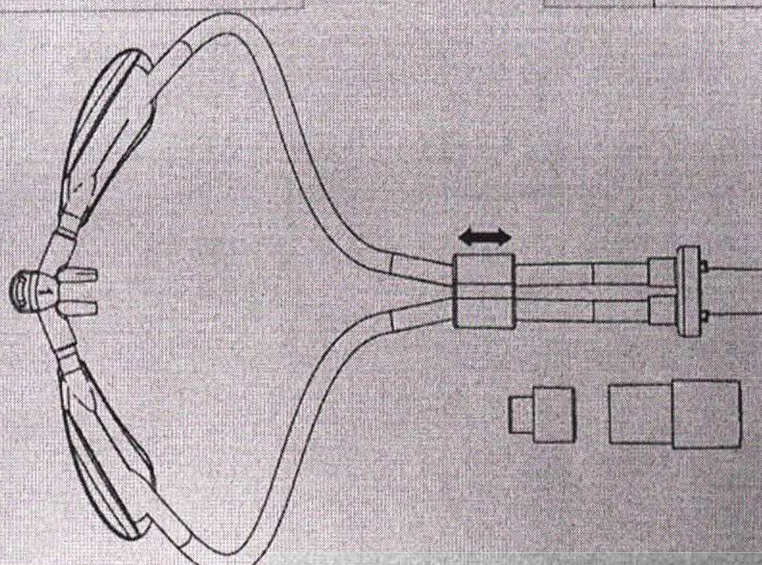

10mmM

Соединение с инспираторным
концом дыхательного контура

Доступные коды продукции

AMNC2001	Basic, размер premature (от 1 до 8 л/мин)	AMNC3001	NeoFlow, размер premature (от 1 до 8 л/мин, изумрудный)
AMNC2002	Basic, размер neonatal (от 1 до 8 л/мин)	AMNC3002	NeoFlow, размер neonatal (от 1 до 8 л/мин, белый)
AMNC2003	Basic, размер infant (от 1 до 10 л/мин)	AMNC3003	NeoFlow, размер infant (от 1 до 10 л/мин, светло-фиолетовый)
AMNC2004	Basic, размер large infant (от 1 до 20 л/мин)	AMNC3004	NeoFlow, размер large infant (от 1 до 20 л/мин, темно-фиолетовый)
AMNC2005	Basic, размер paediatric (от 1 до 25 л/мин)	AMNC3005	NeoFlow, размер paediatric (от 1 до 25 л/мин, зеленый)

LOT

000000



0000-00

www.armstrongmedical.net

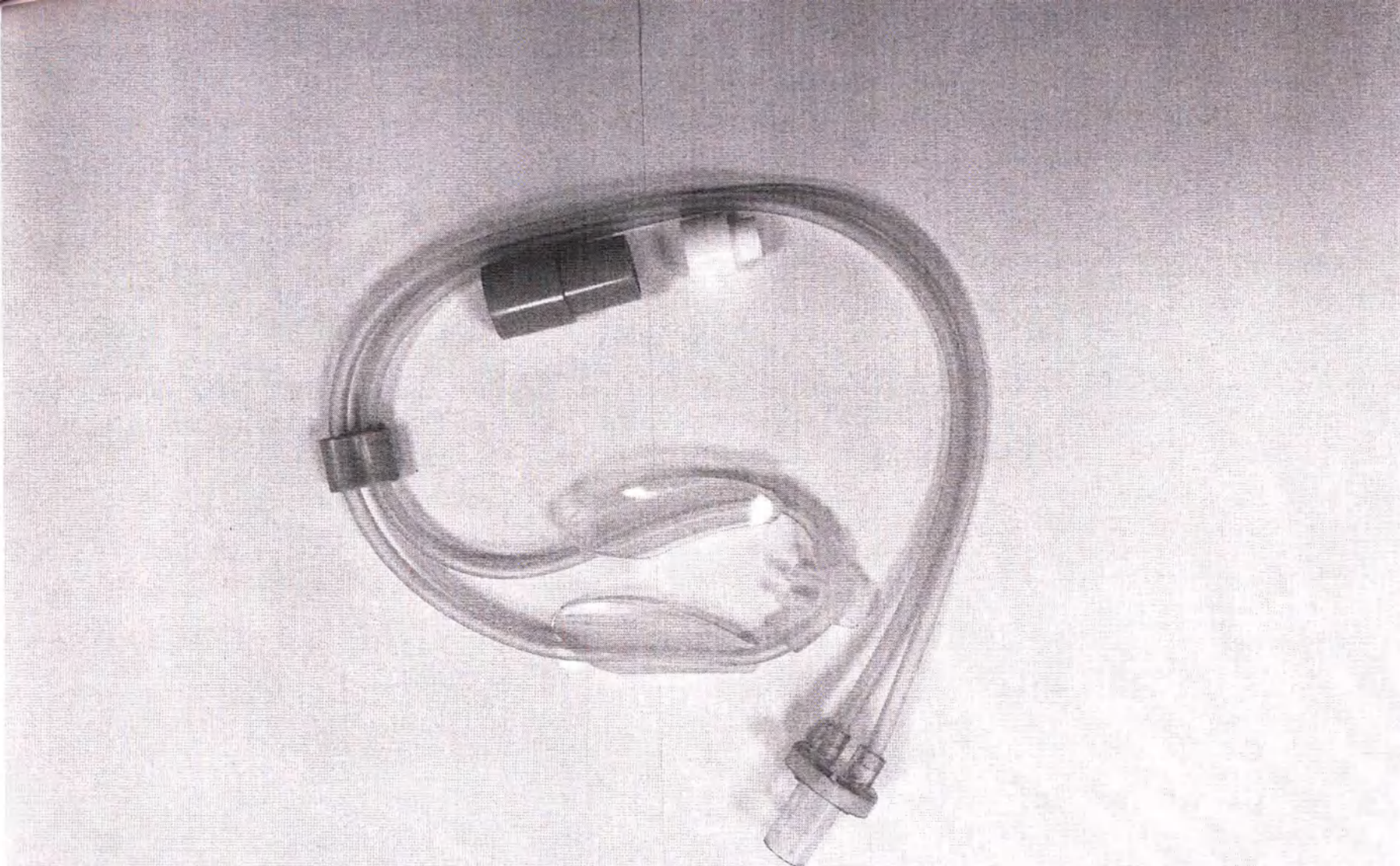


Рисунок 29. Назальная канюля NeoFlow infant. Общий вид в индивидуальной упаковке

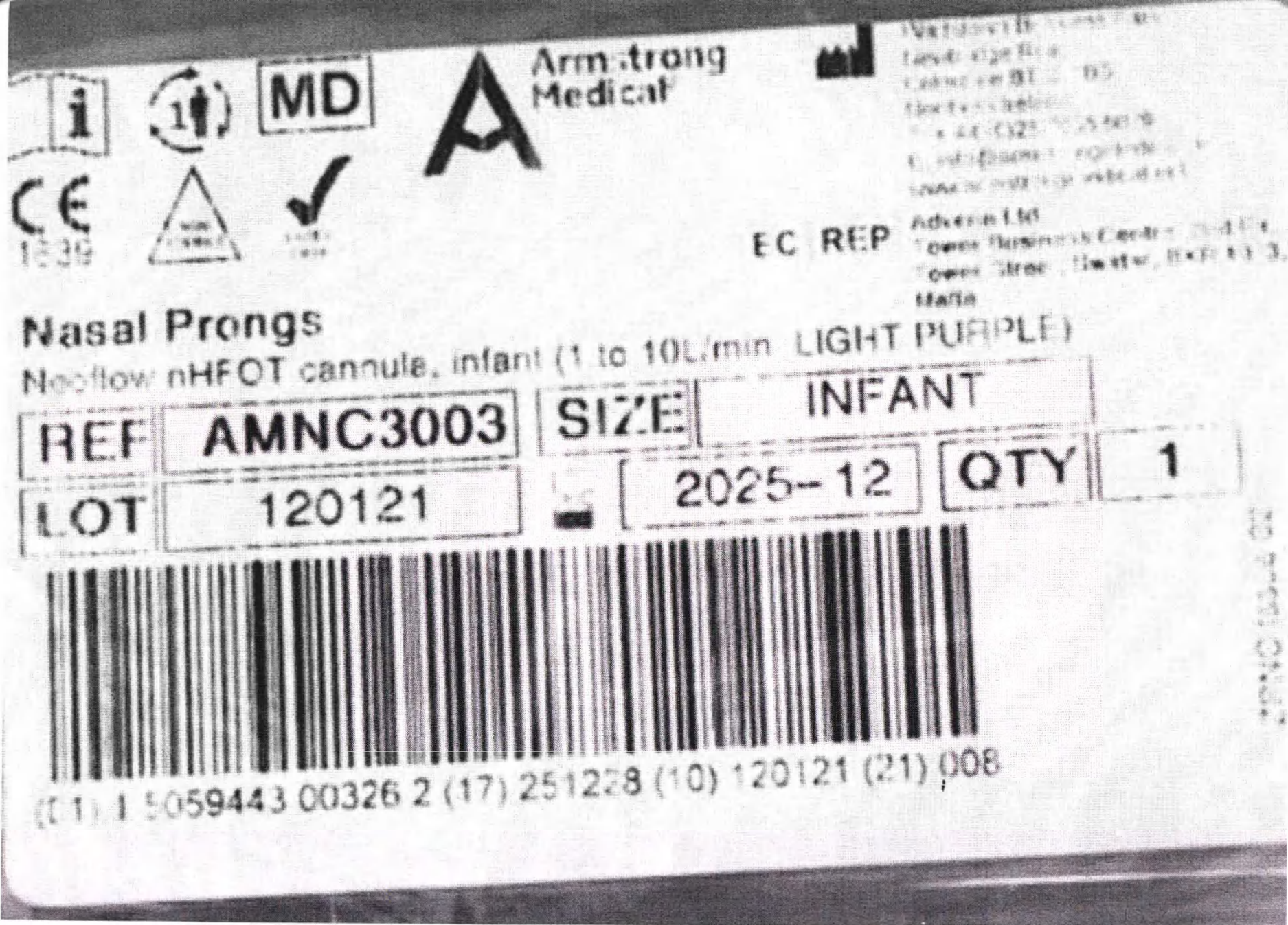


Рисунок 30. Назальная канюля NeoFlow infant. Заводская маркировка

Наименование согласно РУ№

Канюли назальные одноразовые для
высокопоточной кислородной терапии



Назальная канюля NeoFlow infant

REF	AMNC3003
------------	----------

Количество	1 штука
------------	---------

LOT	0000000
------------	---------

	0000 - 00
---	-----------

Официальный дистрибьютор
ООО "БРМ", 107031, г. Москва,
Петровский переулок 1/30, стр. 1,
(495) 629 - 44 - 70



Армстронг Медикал Лимитед, Уоттстоун Бизнес
Парк, Ньюбридж Роад, Колерэйн, Северная
Ирландия BT52 1BC, Великобритания
Тел.: + 44 (0) 28 7035 6029
эл. почта: info@armstrongmedical.net



НЕ ТОКСИЧНО ВНУТРИ

Рисунок 31. Назальная канюля NeoFlow infant. Маркировка на русском языке

NeoFlow

Канюли назальные односторонние для высокоточной кислородной терапии, для использования с дыхательными контурами Armstrong Medical в отделениях реанимации, интенсивной терапии, и для амбулаторного лечения.


Перед клиническим использованием, пожалуйста

- внимательно прочтите следующие рекомендации:**
1. Выберите правильный размер зубцов для пациента с учетом предполагаемой скорости потока газа. Не закрывайте ноздри зубами.
 2. Выберите расход газа и концентрацию кислорода (SaO2) или выдыхания CO2, при необходимом уровне насыщения артериальной крови кислородом.
 3. Подсоедините дистальный конец канюли к инспираторному концу дыхательного контура и убедитесь, что поток присутствует перед присоединением к пациенту.
 4. Поместите кончики зубцов канюли в ноздри пациента, убедившись, что кончики зубцов расположены в правой и левой ноздрях соответственно, и убедитесь, что кончики зубцов направлены под углом вверх от губного желоба.
 5. Закрепите на месте с помощью предпочтительного метода фиксации (коллажом или аксессуаром лицевой фиксации). В качестве альтернативы, наденьте петлю на уши пациента и закрепите под подбородком.
 6. Контролируйте уровень насыщения артериальной крови кислородом и пульсоксиметрию с помощью подвешенного устройства стороннего производителя.
 7. Данное изделие гарантировано для использования на 1 (одном) пациенте в течение максимум 7 дней с даты первоначального использования или удаления из первичной упаковки.
 8. Замените, если изделие загрязнено или возникла окклюзия.
 9. За технический помощью обращайтесь в Armstrong Medical или к местному представителю.

Предупреждения:

1. Обеспечьте непрерывный мониторинг SaO2 и при необходимости отрегулируйте подачу кислорода.
2. Не использовать при потоке газа < 1 л / мин.
3. Не закрывайте ротовую полость никакими устройствами, предназначенными для предотвращения или ограничения вдоха/выдоха пациента.
4. При использовании этого изделия в носовой полости возможны низкие уровни CPAP на вдохе и/или выдохе (постоянное положительное давление в дыхательных путях).
5. Используйте в сочетании с дыхательным контуром с активным увлажнением для продолжительной терапии в течение часа и более. Рекомендуется использовать дыхательный контур с подогревом и увлажнением.
6. При использовании с активным увлажнением убедитесь, что увлажнитель настроен и поддерживается в «инвазивном» режиме.
7. Убедитесь, что использование прекращено через 7 дней с даты первого использования.
8. Держите упаковку закрытой до использования (риск закупорки посторонними предметами).
9. НЕ мойте, не чистите и не пытайтесь стерилизовать этот продукт.
10. Не разбирайте устройство (опасность вдыхания / проглатывания мелких деталей).

Канюля назальная

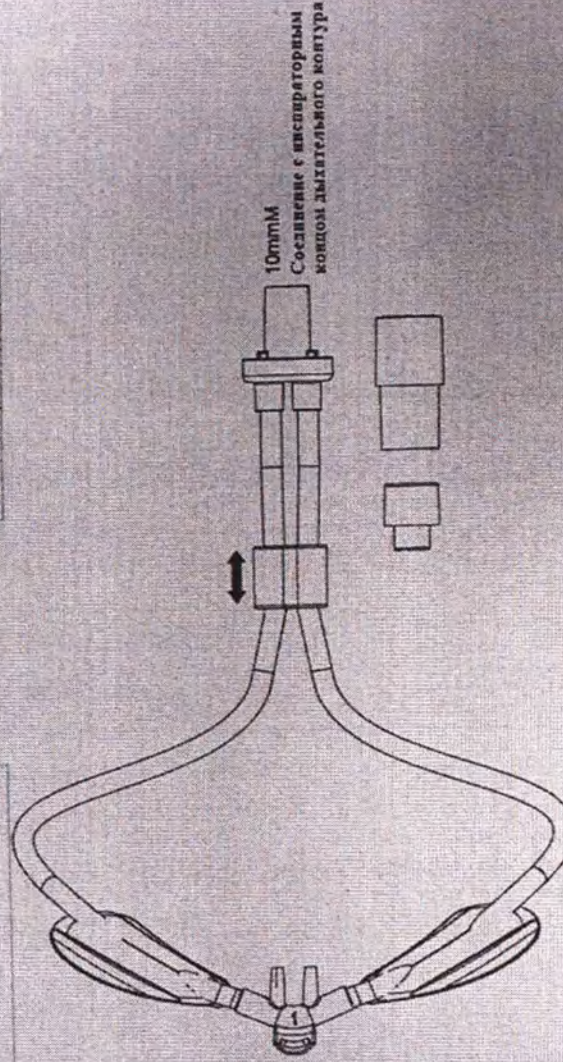

Доступные коды продукции

AMNC2001	Basic, размер респиратора (от 1 до 8 л/мин)	AMNC3001	Needow, размер респиратора (от 1 до 8 л/мин, красный)
AMNC2002	Basic, размер респиратора (от 1 до 8 л/мин)	AMNC3002	Needow, размер респиратора (от 1 до 8 л/мин, желтый)
AMNC2003	Basic, размер респиратора (от 1 до 10 л/мин)	AMNC3003	Needow, размер респиратора (от 1 до 10 л/мин, светло-фиолетовый)
AMNC2004	Basic, размер респиратора (от 1 до 20 л/мин)	AMNC3004	Needow, размер респиратора (от 1 до 20 л/мин, темно-фиолетовый)
AMNC2005	Basic, размер респиратора (от 1 до 25 л/мин)	AMNC3005	Needow, размер респиратора (от 1 до 25 л/мин, белый)

LOT

000000
0000-00

www.armstrongmedical.net

Armstrong Medical

Wattstown Business Park
Newbridge Road
Coleraine BT52 1BS
Northern Ireland

Tel: +44 (0)28 7035 6029

E-mail: info@armstrongmedical.net

Advena Ltd
Tower Business Centre, 2nd Flr,
Tower Street, Swale, BKR 4013
Malla

EC REP

MD
LATEX FREE

CE
1639



Эксклюзивный представитель в
России

ООО «БРМ»

г. Москва, Петровский пер., 1/30 стр.1

www.brm-ross.ru

REF

AMNC3003

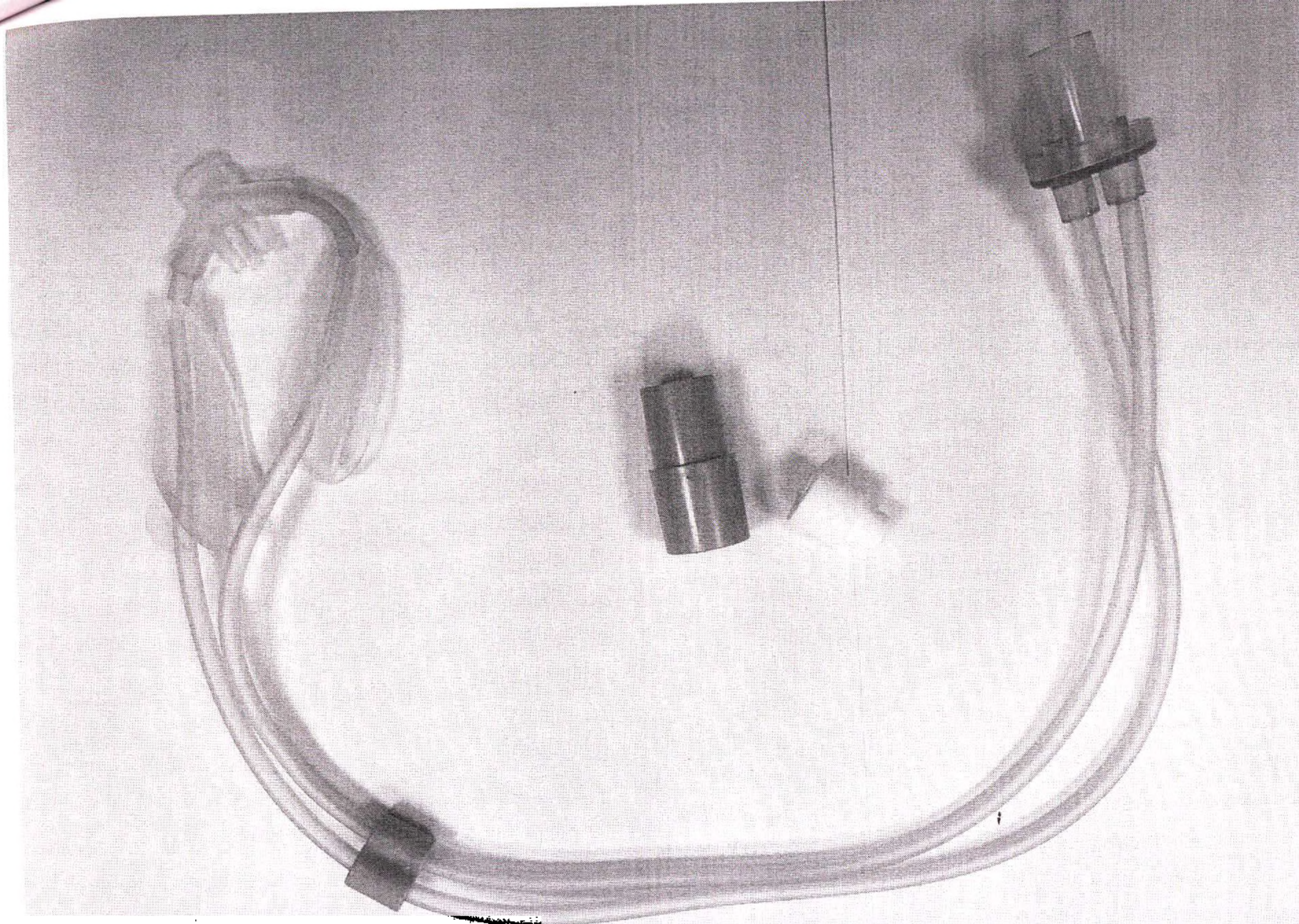


Рисунок 33 Назальная канюля NeoFlow large infant. Общий вид в индивидуальной упаковке



Рисунок 34. Назальная канюля NeoFlow large infant. Заводская маркировка

Наименование согласно РУ№

Канюли назальные одноразовые для
высокопоточной кислородной терапии



Назальная канюля NeoFlow large infant

REF AMNC3004

Количество 1 штука

LOT 0000000

 0000 - 00


Официальный дистрибьютор
ООО "БРМ", 107031, г. Москва.
Петровский переулок 1/30, стр 1
(495) 629 - 44 - 70



Армстронг Медикал Лимитед, Уоттстоун Бизнес
Парк, Ньюбридж Роад, Колерэйн, Северная
Ирландия BT52 1BC, Великобритания

Тел.: + 44 (0) 28 7035 6029

эл.почта: info@armstrongmedical.net

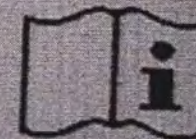

НЕ ТОКСИЧНО ВНУТРИ

Рисунок 35. Назальная канюля NeoFlow large infant. Маркировка на русском языке

NeoFlow

Канюли назальные одноразовые для высокопоточной кислородной терапии, для использования с дыхательными контурами Armstrong Medical в отделениях реанимации, интенсивной терапии, и для амбулаторного лечения.

Перед клиническим использованием, пожалуйста внимательно прочтите следующие рекомендации:

1. Выберите правильный размер зубцов для пациента с учетом предполагаемой скорости потока газа. Не закрывайте ноздри зубцами.
2. Выберите расход газа и концентрацию кислорода, которые необходимы для достижения необходимого уровня насыщения артериальной крови кислородом (SaO2) или вымывания CO2, при сохранении комфорта пациента.
3. Подсоедините дистальный конец канюли к инспираторному концу дыхательного контура и убедитесь, что поток присутствует перед присоединением к пациенту.
4. Поместите кончики зубцов канюли в ноздри пациента, убедившись, что правый и левый зубцы расположены в правой и левой ноздрях соответственно, и убедитесь, что кончики зубцов направлены под углом вверх от губного желобка.
5. Закрепите на месте с помощью предпочтительного метода фиксации (колпаком или аксессуарами лицевой фиксации). В качестве альтернативы, наденьте петлю на уши пациента и закрепите под подбородком.
6. Контролируйте уровень насыщения артериальной крови кислородом и пульсоксиметрию с помощью подходящего устройства стороннего производителя.
7. Данное изделие гарантировано для использования на 1 (одном) пациенте в течение максимум 7 дней с даты первоначального использования или удаления из первичной упаковки.
8. Замените, если изделие контаминировано или возникла окклюзия.
9. За технической помощью обращайтесь в Armstrong Medical или к местному представителю.

Предупреждения:

1. Обеспечьте непрерывный мониторинг SaO2 и при необходимости отрегулируйте подачу кислорода.
2. Не использовать при потоке газа <1 л / мин.
3. Не закрывайте ротовую полость никакими устройствами, предназначенными для предотвращения или ограничения вдоха/выдоха пациента.
4. При использовании этого изделия в носовой полости возможны низкие уровни CPAP на вдохе и/или выдохе (постоянное положительное давление в дыхательных путях).
5. Используйте в сочетании с дыхательным контуром с активным увлажнением для продолжительной терапии в течении часа и более. Рекомендуется использовать дыхательный контур с подогревом и увлажнением.
6. При использовании с активным увлажнением убедитесь, что увлажнитель настроен и поддерживается в «инвазивном» режиме.
7. Убедитесь, что использование прекращено через 7 дней с даты первого использования.
8. Держите упаковку закрытой до использования (риск закупорки посторонними предметами).
9. НЕ мойте, не чистите и не пытайтесь стерилизовать этот продукт.
10. Не разбирайте устройство (опасность вдыхания / проглатывания мелких деталей).



Wattstown Business Park
Newbridge Road
Coleraine BT52 1BS
Northern Ireland

Tel: +44 (0)28 7035 6029

E-mail: info@armstrongmedical.net



Advena Ltd
Tower Business Centre, 2nd Flr.
Tower Street, Swatara, BKR 4013
Malta



Эксклюзивный представитель в России


ООО «БРМ»

г. Москва, Петровский пер., 1/30 стр.1
www.berner-ross.ru

Канюля назальная

REF

AMNC3004

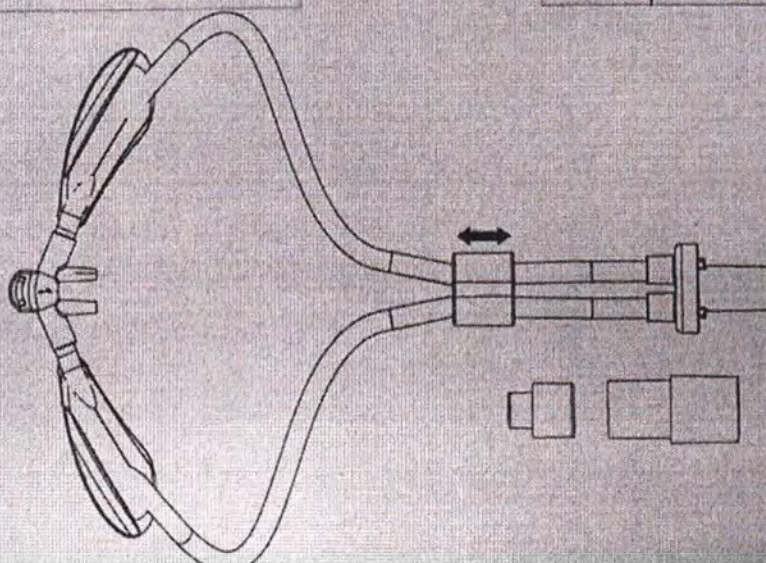


10mmM
Соединение с инспираторным
концом дыхательного контура

Доступные коды продукции

AMNC2001	Basic, размер premature (от 1 до 8 л/мин)	AMNC3001	NeoFlow, размер premature (от 1 до 8 л/мин, красный)
AMNC2002	Basic, размер neonatal (от 1 до 8 л/мин)	AMNC3002	NeoFlow, размер neonatal (от 1 до 8 л/мин, желтый)
AMNC2003	Basic, размер infant (от 1 до 10 л/мин)	AMNC3003	NeoFlow, размер infant (от 1 до 10 л/мин, светло-фиолетовый)
AMNC2004	Basic, размер large infant (от 1 до 20 л/мин)	AMNC3004	NeoFlow, размер large infant (от 1 до 20 л/мин, темно-фиолетовый)
AMNC2005	Basic, размер paediatric (от 1 до 25 л/мин)	AMNC3005	NeoFlow, размер paediatric (от 1 до 25 л/мин, зеленый)

LOT 000000
0000-00

www.armstrongmedical.net

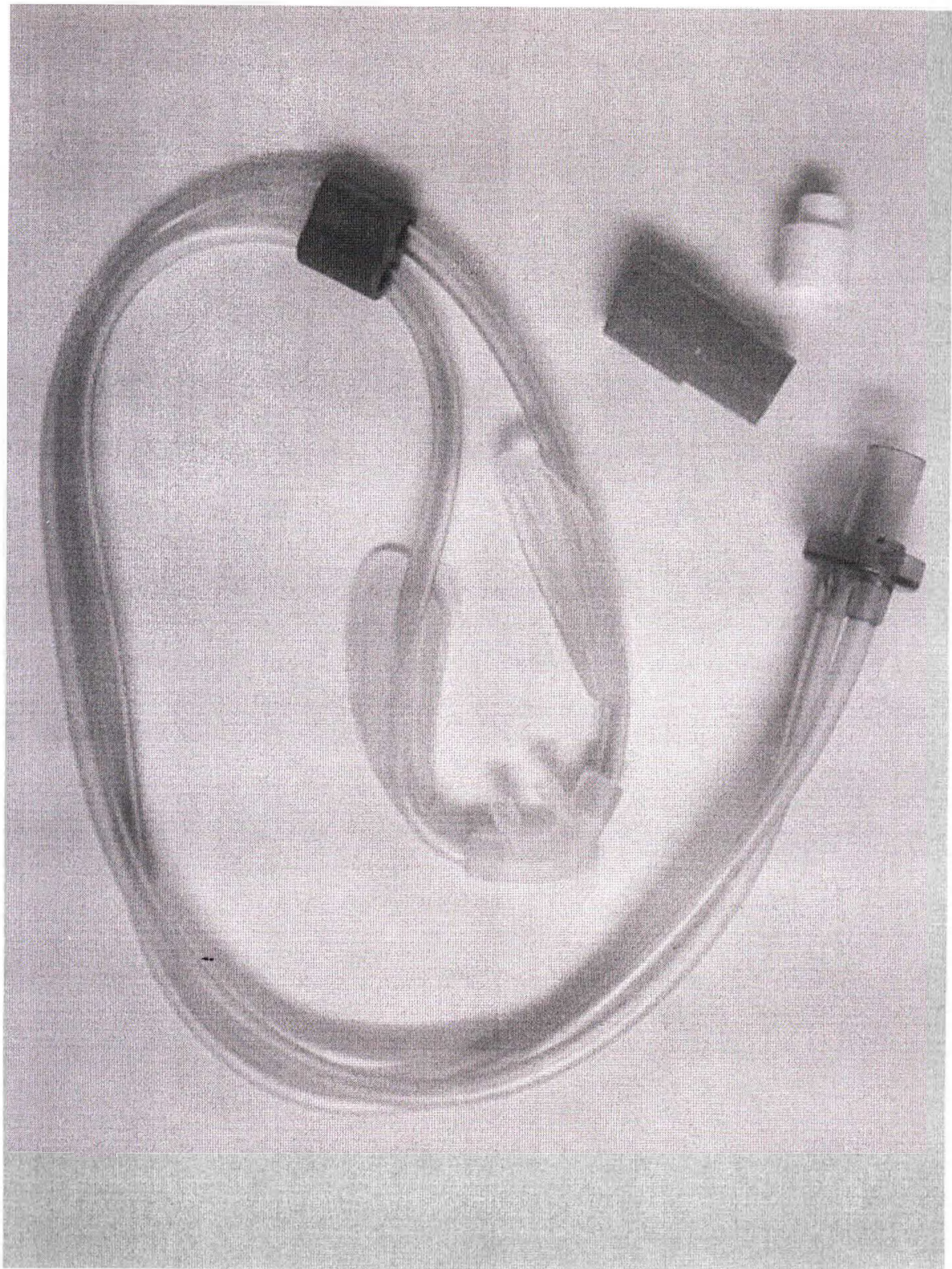









Armstrong Medical

1981 Oliver Road
 Cambridge Road
 Colchester B1 1 8G
 Essex, England
 +44 (0)20 7025 6000
 E: info@armstrongmedical.co.uk
 www.armstrongmedical.co.uk


EC REP

Adventis Ltd
 Tower Business Centre, 1st Fl.
 Tower Street, Twickenham, Surrey TW9 1 3,
 Surrey

Nasal Prongs

NeoFlow nHFOT cannula, paediatric (1 to 25L/min. GREEN)

REF	AMNC3005	SIZE	PAEDIATRIC
LOT	120121	2025-12	QTY 1

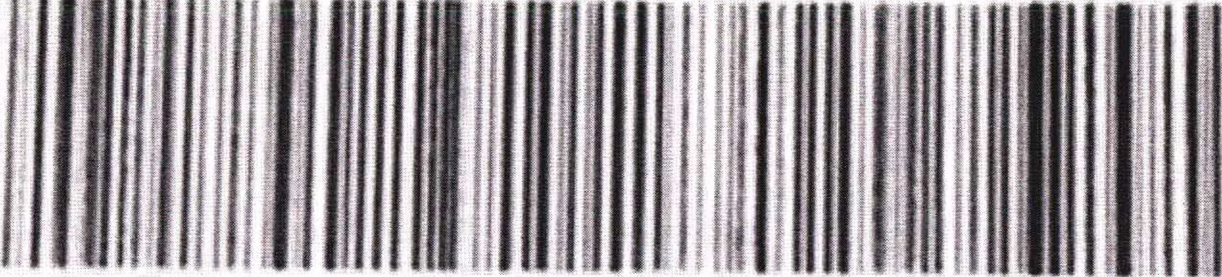

2025120121

(01) 1 5059443 00328 6 (17) 251228 (10) 120121 (21) 012

Рисунок 38. Назальная канюля NeoFlow pediatric. Заводская маркировка

Наименование согласно РУ№

Канюли назальные одноразовые для
высокопоточной кислородной терапии



Назальная канюля NeoFlow pediatric


REF AMNC3005

Количество 1 штука

LOT 0000000

Официальный дистрибьютор
ООО "БРМ", 107031, г. Москва,
Петровский переулок 1/30, стр. 1,
(495) 629 - 44 - 70

 0000 - 00

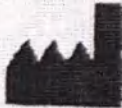 Армстронг Медикал Лимитед, Уоттстоун Бизнес
Парк, Ньюбридж Роад, Колерэйн, Северная
Ирландия BT52 1BC, Великобритания
Тел.: + 44 (0) 28 7035 6029



эл.почта: info@armstrongmedical.net

НЕ ТОКСИЧНО ВНУТРИ

NeoFlow

Канюли назальные одноразовые для высокопоточной кислородной терапии, для использования с дыхательными контурами Armstrong Medical в отделениях реанимации, интенсивной терапии, и для амбулаторного лечения.

Перед клиническим использованием, пожалуйста внимательно прочтите следующие рекомендации:

1. Выберите правильный размер зубцов для пациента с учетом предполагаемой скорости потока газа. Не закрывайте ноздри зубцами.
2. Выберите расход газа и концентрацию кислорода, которые необходимы для достижения необходимого уровня насыщения артериальной крови кислородом (SaO2) или вымывания CO2, при сохранении комфорта пациента.
3. Подсоедините дистальный конец канюли к инспираторному концу дыхательного контура и убедитесь, что поток присутствует перед присоединением к пациенту.
4. Поместите кончики зубцов канюли в ноздри пациента, убедившись, что правый и левый зубцы направлены под углом вверх от губного желобка.
5. Закрепите на месте с помощью предпочтительного метода фиксации (колпаком или аксессуарами лицевой фиксации). В качестве альтернативы, надените петлю на уши пациента и закрепите под подбородком.
6. Контролируйте уровень насыщения артериальной крови кислородом и пульсоксиметрию с помощью подходящего устройства стороннего производителя.
7. Данное изделие гарантировано для использования на 1 (одном) пациенте в течение максимум 7 дней с даты первоначального использования или удаления из первичной упаковки.
8. Замените, если изделие контаминировано или возникла окклюзия.
9. За технической помощью обращайтесь в Armstrong Medical или к местному представителю.

Предупреждения:


1. Обеспечьте непрерывный мониторинг SaO2 и при необходимости отрегулируйте подачу кислорода.
2. Не использовать при потоке газа <1 л / мин.
3. Не закрывайте ротовую полость никакими устройствами, предназначенными для предотвращения или ограничения вдоха/выдоха пациента.
4. При использовании этого изделия в носовой полости возможны низкие уровни CPAP на вдохе и/или выдохе (постоянное положительное давление в дыхательных путях).
5. Используйте в сочетании с дыхательным контуром с активным увлажнением для продолжительной терапии в течение часа и более. Рекомендуется использовать дыхательный контур с подогревом и увлажнением.
6. При использовании с активным увлажнением убедитесь, что увлажнитель настроен и поддерживается в «кназивном» режиме.
7. Убедитесь, что использование прекращено через 7 дней с даты первого использования.
8. Держите упаковку закрытой до использования (риск закупорки посторонними предметами).
9. НЕ мойте, не чистите и не пытайтесь стерилизовать этот продукт.
10. Не разбирайте устройство (опасность вдыхания / проглатывания мелких деталей).



Wattstown Business Park
Newbridge Road
Coleraine BT52 1BS
Northern Ireland

Tel: +44 (0)28 7035 6029

E-mail: info@armstrongmedical.net

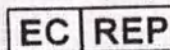

Advena Ltd
Tower Business Centre, 2nd Flr,
Tower Street, Swatara, BKR 4013
Malta



Эксклюзивный представитель в
России


ООО «БРМ»

г. Москва, Петровский пер., 1/30 стр.1
www.berner-ross.ru

Канюля назальная

REF

AMNC3005

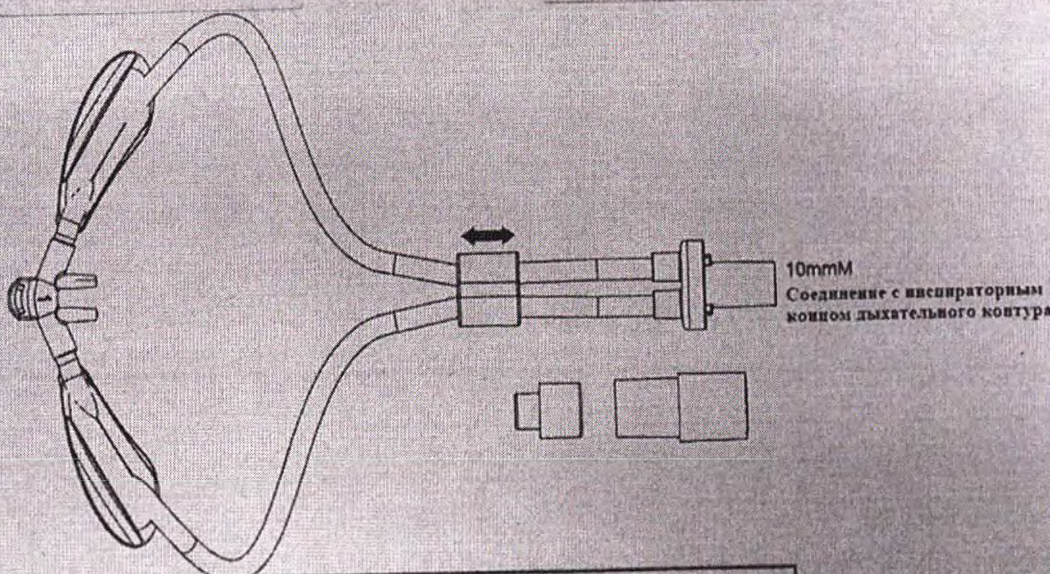

Доступные коды продукции

AMNC2001	Basic, размер premature (от 1 до 8 л/мин)	AMNC3001	NeoFlow, размер premature (от 1 до 8 л/мин, красный)
AMNC2002	Basic, размер neonatal (от 1 до 8 л/мин)	AMNC3002	NeoFlow, размер neonatal (от 1 до 8 л/мин, желтый)
AMNC2003	Basic, размер infant (от 1 до 10 л/мин)	AMNC3003	NeoFlow, размер infant (от 1 до 10 л/мин, светло-фиолетовый)
AMNC2004	Basic, размер large infant (от 1 до 20 л/мин)	AMNC3004	NeoFlow, размер large infant (от 1 до 20 л/мин, темно-фиолетовый)
AMNC2005	Basic, размер paediatric (от 1 до 25 л/мин)	AMNC3005	NeoFlow, размер paediatric (от 1 до 25 л/мин, зеленый)

LOT 000000
0000-00

www.armstrongmedical.net

Рисунок 40. Макет инструкции вкладыша для Назальной канюли NeoFlow pediatric.



Рисунок 41. Назальная канюля AquaNASE, размер small. Общий вид в индивидуальной упаковке

Наименование согласно РУ№

Канюли назальные одноразовые для
высокопоточной кислородной терапии



Назальная канюля AquaNASE, размер small

REF	AMNS2004
-----	----------

Количество	1 штука
------------	---------

LOT	0000000
-----	---------

Официальный дистрибьютор: ООО
"БРМ", 107031, г. Москва,
Петровский переулок 1/30, стр. 1.
(495) 629 - 44 - 70



0000 - 00



Армстронг Медикал Лимитед, Уоттстоун Бизнес
Парк, Ньюбридж Роад, Колерэйн, Северная
Ирландия BT52 1BC, Великобритания
Тел.: + 44 (0) 28 7035 6029



эл. почта: info@armstrongmedical.net

НЕ ТОКСИЧНО ВНУТРИ

Рисунок 42. Назальная канюля AquaNASE, размер small. Маркировка на русском языке

AquaNASE®

Канюли назальные одноходовые для высокоточной кислородной терапии, для использования с дыхательными контурами Armstrong Medical в отделенных реанимациях, интенсивной терапии, и для амбулаторного лечения.

Перед клиническим использованием, пожалуйста, внимательно прочтите следующие рекомендации:

1. Выберите правильный размер для пациента (таблицу в упаковке), чтобы носовые зубцы не полностью закрывали носовую полость, в противном случае будет снижена эффективность лечения.
2. Выберите расход газа и концентрацию кислорода, которые необходимы для достижения необходимого уровня насыщения артериальной крови кислородом (SaO2) или выдыхания CO2, при сохранении комфорта пациента.
3. Подсоедините (A) к инспираторному контуру дыхательного контура и убедитесь, что поток воздуха поступает перед присоединением к пациенту.
4. Прикрепите (B) к пациенту, убедившись, что правый и левый зубцы расположены в правой и левой ноздрях соответственно.
5. Разместите эластичный ремешок (C) вокруг головы пациента и отрегулируйте концы, чтобы зафиксировать устройство.
6. При необходимости разместите петлю (D) на шее пациента и отрегулируйте ее так, чтобы удерживать (A) в нужном положении.
7. При необходимости закройте трубку на пикаме или халате пациента с помощью зажима (E).
8. При необходимости нажмите на торцевую заглушку (F), чтобы открыть конец (B).
9. Мониторинг SaO2 через подключенное устройство.
10. Данное устройство предназначено для использования на 1 (одном) пациенте в течение максимум 7 дней с даты первоначального использования или извлечения из первичной упаковки.
11. Для получения технической помощи свяжитесь с компанией Armstrong Medical или вашим местным представителем.

Предупреждения:

1. Обеспечьте непрерывный мониторинг SaO2 и при необходимости отрегулируйте подачу кислорода.
2. Не используйте при потоке газа < 5 л / мин.
3. Не закрывайте ротовую полость никакими устройствами, предназначенными для предотвращения или ограничения вдоха/выдоха пациента.
4. При использовании этого устройства в носовой полости возможны легкие и/или умеренные кровотечения (постоянное положительное давление в дыхательных путях).
5. Используйте в сочетании с дыхательным контуром с активным увлажнением для продолжительной терапии в течение 24 часов. Рекомендуется использовать дыхательный контур с подогревом и увлажнением.
6. При использовании с активным увлажнением убедитесь, что увлажнитель настроен и поддерживается в «оптимальном» режиме.
7. Убедитесь, что использование прекращено через 7 дней с даты первого использования.
8. Держите упаковку закрытой до использования (риск закупорки посторонними предметами).
9. Не мойте, не чистите и не пытайтесь стерилизовать этот продукт.
10. Не разбирайте устройство (опасность вдыхания / проглатывания мелких деталей).


Канюля назальная

Для высокоточной кислородной терапии

Размер: Small (диаметр назального зубца канюли 4мм)

REF

AMNS2004

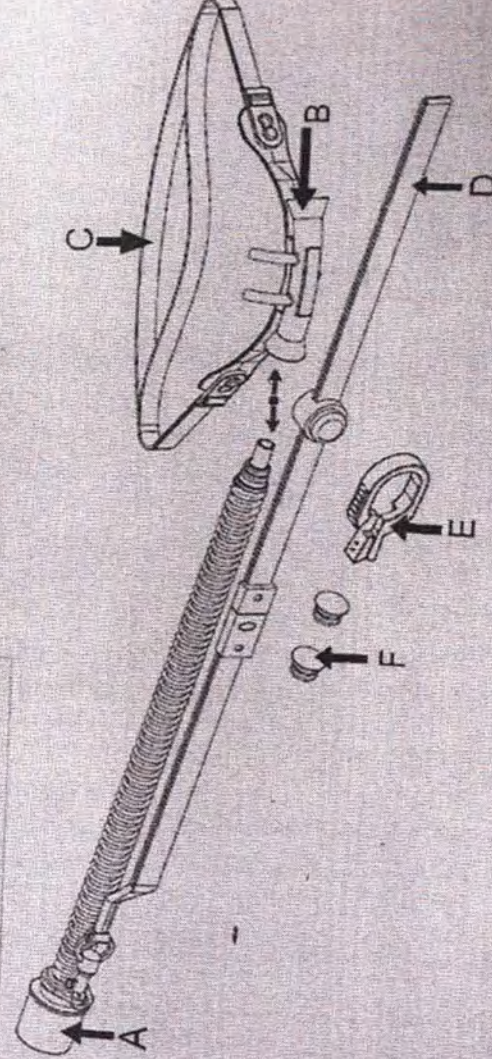

Руководство по выбору канюли

mm	5-60L/min	mm	10-80L/min	mm	10-80L/min
4	30-50 kg	5	50-70 kg	6	>70 kg

Размер	Диаметр зубца
Small	4mm
Medium	5mm
Large	6mm

LOT

000000

0000-00

Armstrong Medical

Wattstown Business Park
Newbridge Road
Coleraine BT52 1BS
Northern Ireland

Tel: +44 (0)28 7035 6029

E-mail: info@armstrongmedical.net

EC REP

Advena Ltd
Lower Business Centre, 2nd Flr,
Tower Street, Swale, UKR 4013
Malta



Эксклюзивный представитель в
России

ООО «БРМ»

г. Москва, Петровский пер., 1/30 стр.1

www.berner-gross.ru

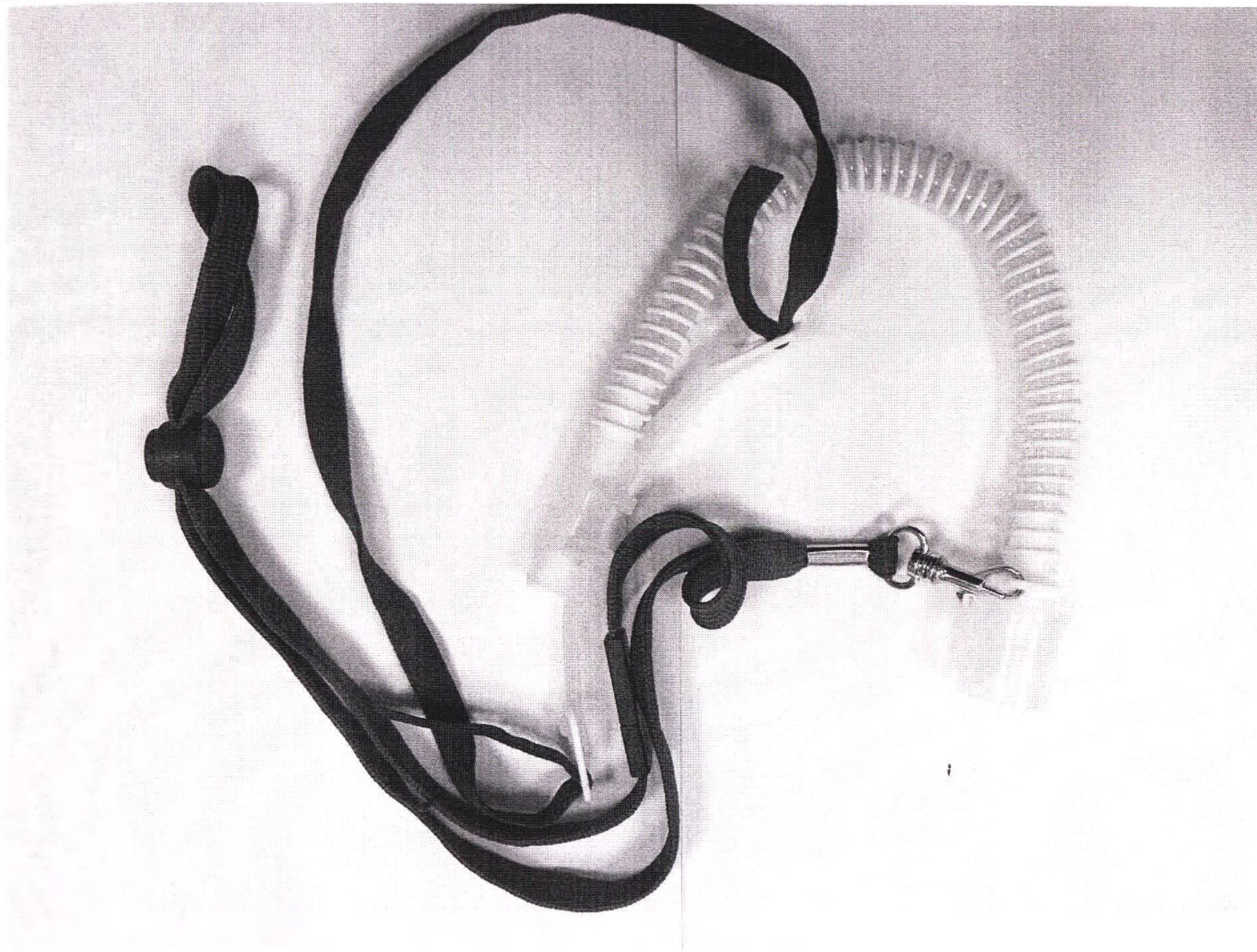


Рисунок 44. Назальная канюля AquaNASE, размер medium. Общий вид в индивидуальной упаковке

Наименование согласно РУ№

Канюли назальные одноразовые для
высокопоточной кислородной терапии



Назальная канюля AquaNASE, размер medium

REF	AMNS2005
-----	----------

Количество	1 штука
------------	---------

LOT	0000000
-----	---------

Официальный дистрибьютор: ООО
"БРМ", 107031, г. Москва,
Петровский переулок 1/30, стр. 1.
(495) 629 - 44 - 70



0000 - 00



Армстронг Медикал Лимитед, Уоттстоун Бизнес
Парк, Ньюбридж Роад, Колерэйн, Северная
Ирландия BT52 1BC, Великобритания
Тел.: + 44 (0) 28 7035 6029

эл.почта: info@armstrongmedical.net



НЕ ТОКСИЧНО ВНУТРИ

Рисунок 45. Назальная канюля AquaNASE, размер medium. Маркировка на русском языке.

AquaNASE®

Канюли назальные одноканальные для высокоточной кислородной терапии, для использования с дыхательными контурами Armstrong Medical в отделениях реанимации, интенсивной терапии, и для амбулаторного лечения.

Перед клиническим использованием, пожалуйста внимательно прочтите следующие рекомендации:

1. Выберите правильный размер для пациента таким образом, чтобы носовые зубы не полностью закрывали ноздри, а вокруг каждого зуба был виден захват (носовые зубы диаметром 4, 5 или 6 мм)
2. Выберите расход газа и концентрацию кислорода, которые необходимы для достижения необходимого уровня насыщения артериальной крови кислородом (SaO2) или вымывания CO2, при сохранении комфорта пациента
3. Подсоедините (A) к инспираторному концу дыхательного контура и убедитесь, что поток присутствует перед присоединением к пациенту.
4. Прикрепите (B) к пациенту, убедившись, что правый и левый зубы расположены в правой и левой ноздрях соответственно.
5. Разместите эластичный ремешок (C) вокруг головы пациента и отрегулируйте концы, чтобы закрепить устройство
6. При необходимости разместите петлю (D) на шею пациента и отрегулируйте ее так, чтобы удерживать (A) в нужном положении.
7. При необходимости закрепите трубку на лбу или щеке пациента с помощью зажима (E).
8. При необходимости нажмите на торцевую заглушку (F), чтобы открыть конец (B).
9. Мониторинг SaO2 через подходящее стороннее устройство
10. Данное устройство предназначено для использования на 1 (один) пациенте в течение максимум 7 дней с даты первоначального использования или извлечения из перфорированной упаковки.
11. Для получения технической помощи свяжитесь с компанией Armstrong Medical или вашим местным представителем.


Предупреждения:

1. Обеспечьте непрерывный мониторинг SaO2 и при необходимости отрегулируйте подачу кислорода.
2. Не использовать при потоке газа <5 л / мин.
3. Не закрывайте ротовую полость никакими устройствами, предназначенными для предотвращения или ограничения вдоха/выдоха пациента.
4. При использовании этого устройства в носовой полости возможны низкие уровни CPAP на входе / выходе (постоянное положительное давление в дыхательных путях).
5. Используйте в сочетании с дыхательным контуром с активным увлажнением для продолжительной терапии в течение 24 часов. Рекомендуется использовать дыхательный контур с подогревом и увлажнением
6. При использовании с активным увлажнением убедитесь, что увлажнитель настроен и поддерживается в «инвазивном» режиме
7. Убедитесь, что использование прекращено через 7 дней с даты первого использования.
8. Держите упаковку закрытой до использования (риск закупорки посторонними предметами).
9. Не мойте, не чистите и не пытайтесь стерилизовать этот продукт.
10. Не разбирайте устройство (опасность вдыхания / проглатывания мелких деталей).

Канюля назальная

Для высокоточной кислородной терапии

Размер: Medium (диаметр назального зуба 5mm)

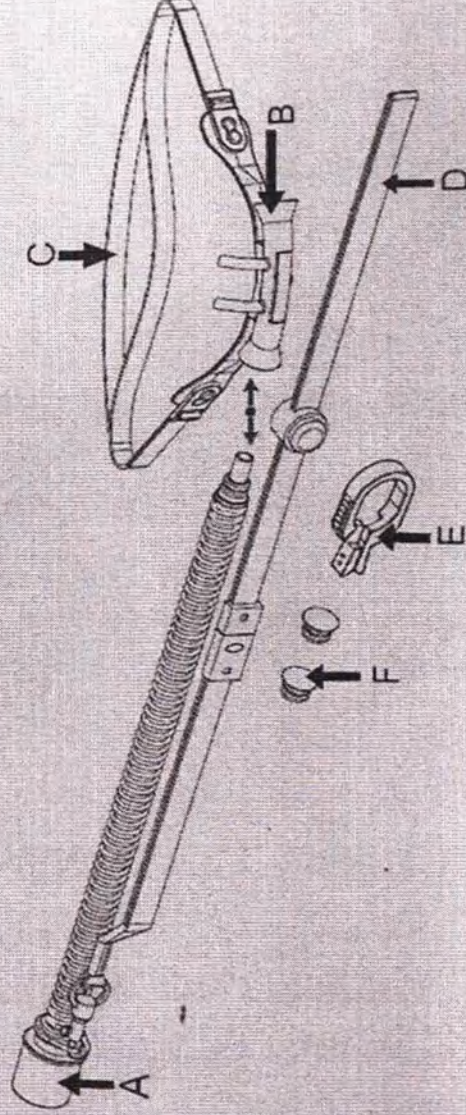

Руководство по выбору канюли

mm	5-60L/min	mm	10-80L/min	mm	10-80L/min
4	30-50 kg	5	50-70 kg	6	>70 kg

Размер	Диаметр зуба
Small	4mm
Medium	5mm
Large	6mm

LOT



000000

0000-00

Armstrong Medical


Wattstown Business Park
Newbridge Road
Coleraine BT52 1BS
Northern Ireland

Tel: +44 (0)28 7035 6029
E-mail: info@armstrongmedical.net

Advena Ltd

Tower Business Centre, 2nd Fl,
Tower Street, Swale, BKR 4013
Malta

EC REP

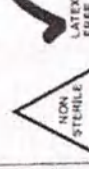

MD 1639



Эксклюзивный представитель в
России

ООО «БРМ»

г. Москва, Петровский пер., 1/30 стр.1
www.brm-gross.ru

REF

AMNS2005

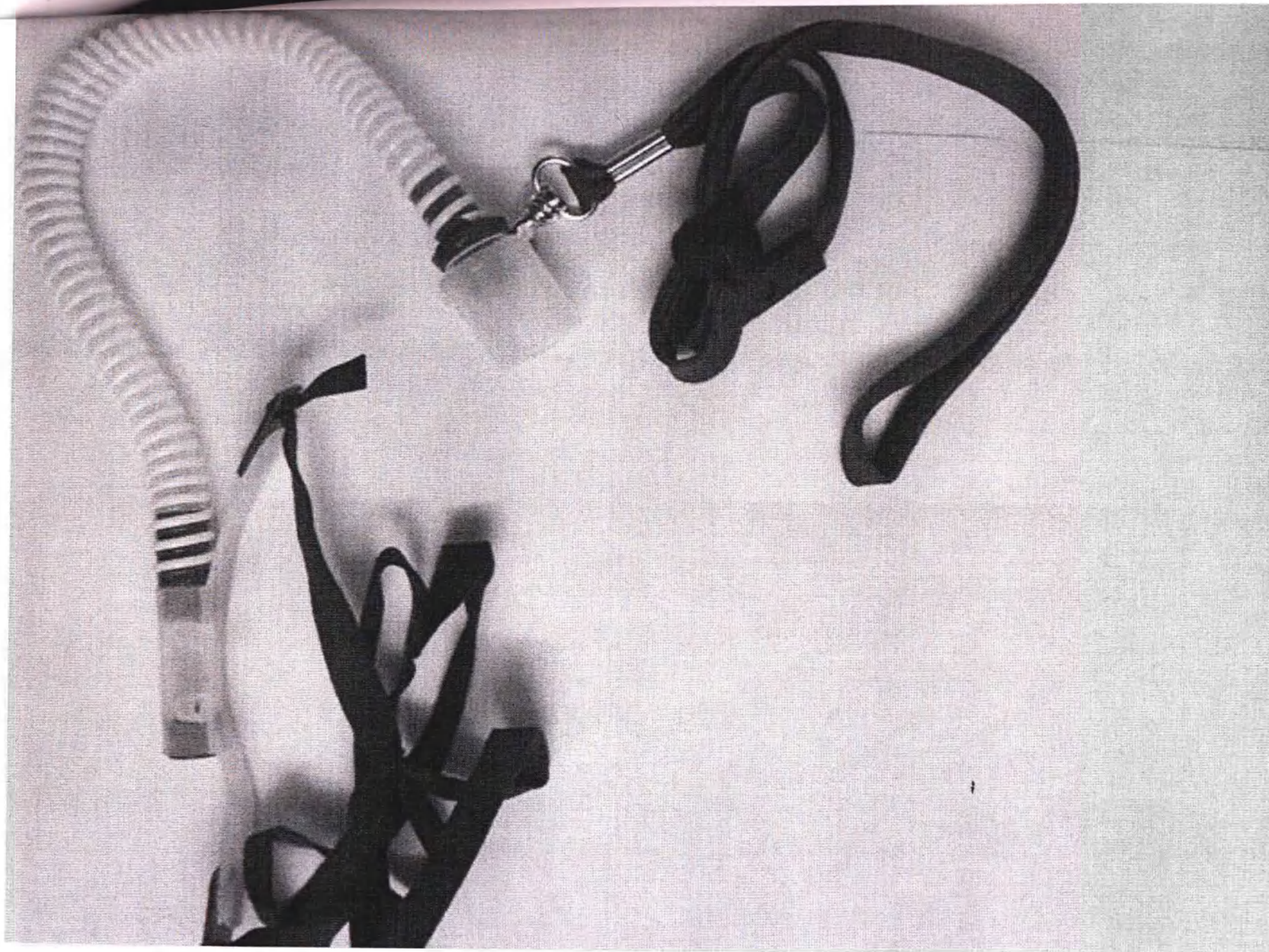


Рисунок 47. Назальная канюля AquaNASE, размер large. Общий вид в индивидуальной упаковке

Наименование согласно РУ№

Канюли назальные одноразовые для
высокопоточной кислородной терапии



Назальная канюля AquaNASE, размер large

REF	AMNS2006
-----	----------

Количество	1 штука
------------	---------

LOT	0000000
-----	---------

Официальный дистрибьютор: ООО
"БРМ", 107031, г. Москва,
Петровский переулок 1/30, стр. 1,
(495) 629 - 44 - 70

 0000 - 00

 Армстронг Медикал Лимитед, Уоттстоун Бизнес
Парк, Ньюбридж Роад, Колерэйн, Северная
Ирландия BT52 1BC, Великобритания
Тел.: + 44 (0) 28 7035 6029



эл.почта: info@armstrongmedical.net

НЕ ТОКСИЧНО ВНУТРИ

Рисунок 48. Назальная канюля AquaNASE, размер large. Маркировка на русском языке.

AquaNASE®

Канюли назальные одноразовые для высокопоточной кислородной терапии, для использования с дыхательными контурами Armstrong Medical в отделениях реанимации, интенсивной терапии, и для амбулаторного лечения.

Перед клиническим использованием, пожалуйста внимательно прочтите следующие рекомендации:

1. Выберите правильный размер для пациента таким образом, чтобы носовые зубцы не полностью заполняли ноздри, а вокруг каждого зубца был видимый зазор (носовые зубцы диаметром 4, 5 или 6 мм)
2. Выберите расход газа и концентрацию кислорода, которые необходимы для достижения необходимого уровня насыщения артериальной крови кислородом (SaO2) или вымывания CO2, при сохранении комфорта пациента.
3. Подсоедините (A) к инспираторному концу дыхательного контура и убедитесь, что поток присутствует перед присоединением к пациенту.
4. Прикрепите (B) к пациенту, убедившись, что правый и левый зубцы расположены в правой и левой ноздрях соответственно.
5. Разместите эластичный ремень (C) вокруг головы пациента и отрегулируйте концы, чтобы закрепить устройство.
6. При необходимости разместите петлю (D) на шее пациента и отрегулируйте ее так, чтобы удерживать (A) в нужном положении.
7. При необходимости закрепите трубку на плече или халате пациента с помощью зажима (E).
8. При необходимости нажмите на торцевую заглушку (F), чтобы открыть конец (B).
9. Мониторинг SaO2 через подходящее стороннее устройство.
10. Данное устройство гарантировано для использования на 1 (одном) пациенте в течение максимум 7 дней с даты первоначального использования или извлечения из перачной упаковки.
11. Для получения технической помощи свяжитесь с компанией Armstrong Medical или вашим местным представителем.

Предупреждения:

1. Обеспечьте непрерывный мониторинг SaO2 и при необходимости отрегулируйте подачу кислорода.
2. Не использовать при потоке газа <5 л / мин.
3. Не закрывайте ротовую полость никакими устройствами, предназначенными для предотвращения или ограничения вдоха/выдоха пациента.
4. При использовании этого устройства в носовой полости возможны низкие уровни CPAP на вдохе и/или выдохе (постоянное положительное давление в дыхательных путях).
5. Используйте в сочетании с дыхательным контуром с активным увлажнением для продолжительной терапии в течение 24 часов. Рекомендуется использовать дыхательный контур с подогревом и увлажнением.
6. При использовании с активным увлажнением убедитесь, что увлажнитель настроен и поддерживается в «инвазивном» режиме.
7. Убедитесь, что использование прекращено через 7 дней с даты первого использования.
8. Держите упаковку закрытой до использования (риск закупорки посторонними предметами).
9. Не мойте, не чистите и не пытайтесь стерилизовать этот продукт.
10. Не разбирайте устройство (опасность вдыхания / проглатывания мелких деталей).

Armstrong Medical

Wattstown Business Park
Newbridge Road
Coleraine BT52 1BS
Northern Ireland

Tel: +44 (0)28 7035 6029

E-mail: info@armstrongmedical.net

EC REP

Advena Ltd
Tower Business Centre, 2nd Flr.
Tower Street, Swatara, BXR 4013
Malta



Эксклюзивный представитель в
России

ООО «БРМ»

г. Москва, Петровский пер., 1/30 стр.1
www.berner-ross.ru


Канюля назальная

Для высокопоточной кислородной терапии

Размер: Large (диаметр назального зубца канюли 6мм)

REF

AMNS2006

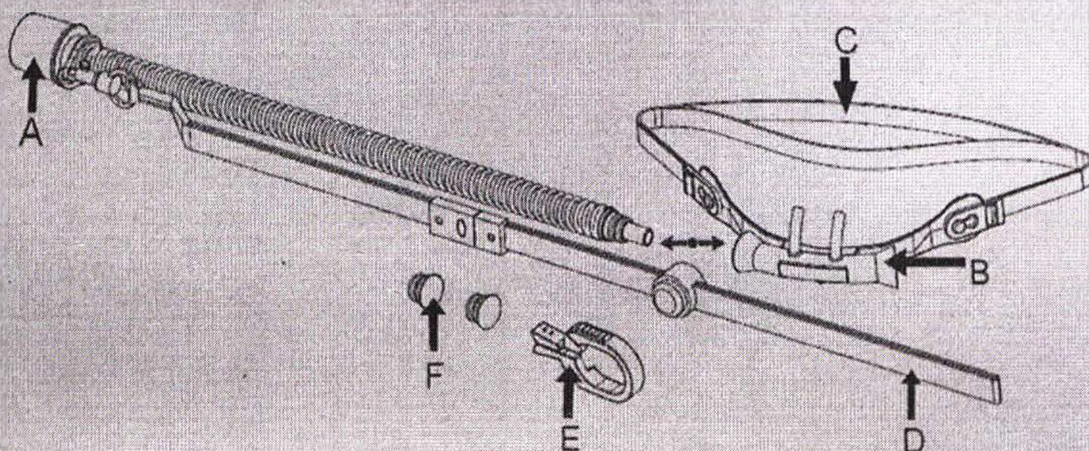

Руководство по выбору канюли

mm	5-60L/min	mm	10-80L/min	mm	10-80L/min
4	30-50 kg	5	50-70 kg	6	>70 kg

Размер	Диаметр зубца
Small	4mm
Medium	5mm
Large	6mm

LOT

000000
0000-00


www.armstrongmedical.net

Всего прошито, пронумеровано и

скреплено печатью 50

(пятьдесят) листа (ов)

Генеральный директор ООО «БРМ»

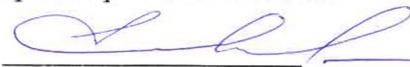Шифрина Е. Б. 

« 06 » декабря 2023 г.

