



АМС-Мед

Поставка лекарств и медицинской
продукции потребителю



ОФИС: +7 (495) 221-40-87

СКЛАД: +7 (495) 1-343-888

ООО «АМС-МЕД»

Юридический адрес: 109554, г. Москва, вн.тер. г.
муниципальный округ Таганский, ул. Рогожский вал, д.10,
этаж/помещ. 12/№182

Фактический адрес, офис:
111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов
д. 56, офисы: 302-419

Фактический адрес, склад:
143900, Московская область, г. Балашиха,
мкр-н "Кучино", полигон владение 3
ИНН/КПП: 7709771052/770901001

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «АМС-Мед»

Махаев В.А.

24 » марта 2023 г.



Фотографии изделия медицинского назначения

**Чехол защитный (презерватив) «АМС-МЕД» для датчика УЗИ
по ТУ 22.19.71-006-84148676-2022**



Общий вид чехла защитного (презерватив) «АМС-МЕД» для датчика УЗИ (в скатанном виде)



Общий вид чехла защитного (презерватив) «АМС-МЕД» для датчика УЗИ (в расправленном виде)



Общий вид индивидуальной упаковки и маркировки индивидуальной упаковки чехла защитного (презерватив) «АМС-МЕД» для датчика УЗИ (лицевая сторона)



Общий вид индивидуальной упаковки и маркировки индивидуальной упаковки чехла защитного (презерватив) «АМС-МЕД» для датчика УЗИ (оборотная сторона)

**Чехол защитный (презерватив) «АМС-МЕД» для датчика УЗИ
по ТУ 22.19.71-006-84148676-2022**

Чехол защитный (презерватив) «АМС-МЕД» для датчика УЗИ

Модель 1 (длина 195 мм, Ø28 мм, толщина 0,070-0,080 мм)

Количество: 100 шт.

Основные размеры: номинальный диаметр – 28 мм, длина – 195 мм, толщина - 0,070-0,080 мм
Чехол защитный (презерватив) предназначен для покрытия ректовагинального датчика УЗИ в качестве гигиенического защитного экрана при проведении трансвагинального (диагностика органов малого таза женщины) и трансректального (исследование прямой кишки) ультразвукового исследования (УЗИ).

Чехол защитный (презерватив) представляет собой изделие, из натуральной латексной смеси, опудренное присыпкой (порошкообразной смесью), цилиндрической формы, без ароматизаторов, смазки и накопителя, натурального (неокрашенного) полупрозрачного цвета. Открытый конец закатан в венчик.

Показание к применению: Проведение диагностических процедур с использованием датчика аппарата УЗИ.

Противопоказания к применению: Данные изделия изготовлены из латекса, который может вызвать аллергические реакции у отдельных лиц. При наличии аллергии на латекс необходимо предупредить об этом врача перед исследованиями.

Побочные эффекты: Аллергические реакции на натуральный латекс в случае индивидуальной непереносимости.


Инструкция по применению:

1. Вымойте руки, наденьте перчатки, вскройте индивидуальную упаковку и достаньте чехол защитный.
2. Наденьте чехол защитный на ректально-вагинальный датчик, аккуратно, расправляя его по всей длине датчика.
3. Проведите исследование.
4. После применения выбросьте презерватив в емкость для отходов.

Утилизация: После использования, изделия уничтожаются как медицинские отходы класса Б согласно СанПиН 2.1.3684.

Условия хранения: Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в закрытых отапливаемых помещениях при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов, без воздействия солнечных лучей.

Общий вид групповой (потребительской) упаковки и маркировки групповой (потребительской) упаковки чехла защитного (презерватив) «АМС-МЕД» для датчика УЗИ (часть 1)

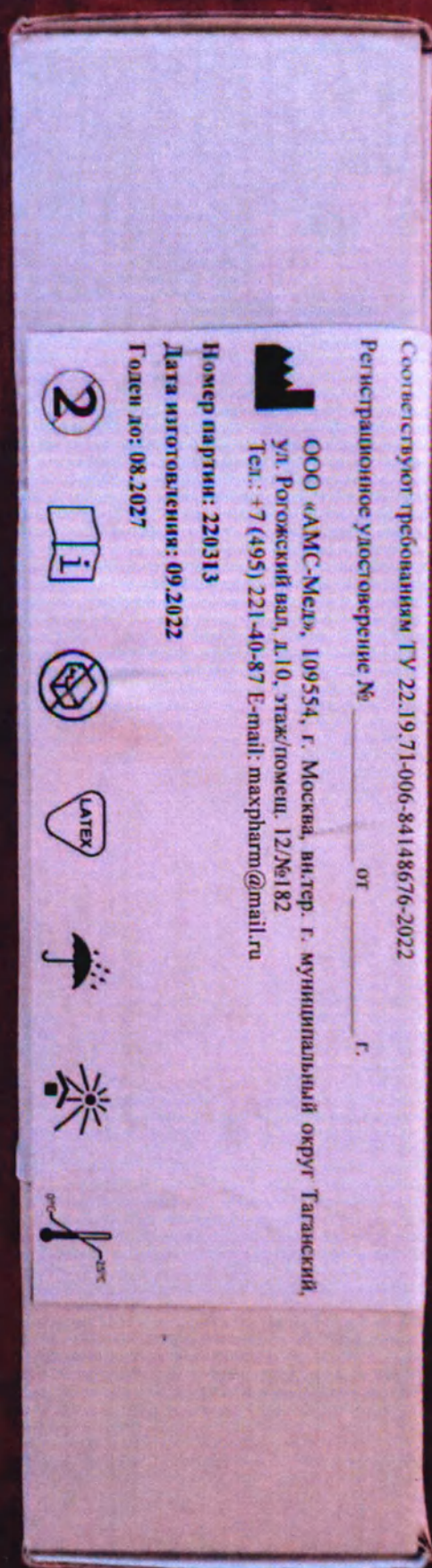

Общий вид групповой (потребительской) упаковки и маркировки групповой (потребительской) упаковки чехла защитного (презерватив) «АМС-МЕД» для датчика УЗИ (часть 2)



Общий вид транспортной упаковки чехла защитного (презерватив) «АМС-МЕД» для датчика УЗИ

**Чехол защитный (презерватив)
«АМС-МЕД» для датчика УЗИ
по ТУ 22.19.71-006-84148676-2022**

ООО «АМС-Мед», 109554, г. Москва, вн.тер. г.
муниципальный округ Таганский, ул. Рогожский
вал, д.10, этаж/помещ. 12/№182

РУ № _____ от _____ г.


ТУ 22.19.71-006-84148676-2022

Количество групповых упаковок: 50 шт.

Номер партии: xxxx

Дата изготовления: xx.xxxx

Годен до: xx.xxxx

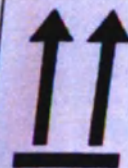

Общий вид маркировки чехла защитного (презерватив) «АМС-МЕД» для датчика УЗИ

ООО «АМС-Мед»
Итого в настоящем документе

9 листа (ов)

Генеральный директор
Махаев В.А.

