

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ INSTRUCTIONS FOR USE



Помпа инфузионная MERIDIAN одноразовая,
стерильная в индивидуальной упаковке
в вариантах исполнения /
Infusion pump MERIDIAN, disposable, sterile,
individually wrapped in versions.

Согласовано/APPROVAL

Meridian Medical Products Ltd
(Меридиан Медикал Продактс Лтд)

Организация/Organization

Langley House, Park Road, London, N2 8EY, United Kingdom

Адрес/Address

Director

Должность/Occupation

Vrina Maria Tome

Фамилия, Имя/ Surname, Name

31/03/2023

Дата ДД.ММ.ГГГГ/Date DD.MM.YYYY


Signed (or sealed) this day in my presence by

Vrina Maria Tome
As the Certifying Officer, I certify only the signature
which appears on document and assume no
responsibility for the content of this document.
In testimony whereof I have hereto set my hand and
official seal this 31 day of March 2023

MICHALAKIS SAVVA
Certifying Officer



M.

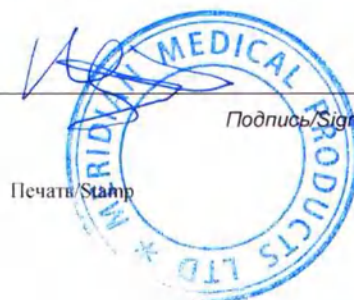

Подпись/Signature

Печать/Stamp

Версия 2 / Version 2

Область применения

Область применения – области медицины, где требуются непрерывное инфузионное введение лекарственных средств с заданной скоростью, например, онкология, кардиология, травматология, хирургия и др. Помпы инфузионные применяют при родовспоможении, обезболивании, химиотерапии и др.

Помпы инфузионные широко используются в больницах и в амбулаторной практике, это передовое медицинское изделие для непрерывной инфузии. Правильное использование инфузионной помпы не только обеспечивает точность введения лекарств и подачи жидкости в вену, но и снижает трудозатраты медицинского персонала.

Наименование медицинского изделия, комплект поставки

Помпа инфузионная MERIDIAN одноразовая, стерильная в индивидуальной упаковке в вариантах исполнения:

1. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 2 мл/ч, модель CP10002 (объем 100 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 00101) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.
11. Luer-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.
14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.

2. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 4 мл/ч, модель CP10004 (объем 100 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 00110) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.
11. Luer-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.

14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.

3. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 5 мл/ч, модель CP10005 (объем 100 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 00111) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.
11. Luer-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.
14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.

4. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 2 мл/ч, модель CP20002 (объем 200 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 00101) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.
11. Luer-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.
14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.

5. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 4 мл/ч, модель CP20004 (объем 200 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 00110) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.

11. Luer-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.
14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.

6. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 5 мл/ч, модель CP20005 (объем 200 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 00111) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.
11. Luer-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.
14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.

7. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 2 мл/ч, модель CP30002 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 00101) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.
11. Luer-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.
14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.

8. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 4 мл/ч, модель CP30004 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.

8. Соединительная трубка (код 00110) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.
11. Luer-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.
14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.

9. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 5 мл/ч, модель CP30005 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 00111) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.
11. Luer-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.
14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.

10. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 2 мл/ч, модель SA10002 (объем 100 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 2 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 00101) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.
11. Luer-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.
14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.

11. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 5 мл/ч, модель SA40005 (объем 400 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 2 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.

5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.:
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 00111) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.
11. Luer-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.
14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.

12. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 10 мл/ч, модель SA40010 (объем 400 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 2 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01000) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.
11. Luer-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.
14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.

13. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4 мл/ч, модель FO10001 (объем 100 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Luer-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

14. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4 мл/ч, модель FO20001 (объем 200 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Люег-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок - 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

15. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4 мл/ч, модель FO30001 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Люег-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок - 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

16. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4 мл/ч, с болюсом, модель FB10001 (объем 100 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 01010) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 10111) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 10010) – 1 шт.

9. Соединительная трубка (код 10001) – 1 шт.
10. Соединительная трубка (код 10000) – 1 шт.
11. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
12. Соединительная трубка (код 01001) – 1 шт.
13. Крепежный зажим – 1 шт.
14. Фильтр – 1 шт.
15. Болюсное устройство (РСА) (1мл/15 мин, 1мл/30 мин, 2мл/15 мин, 2мл/30 мин) – 1 шт.
16. Регулятор скорости потока – 1 шт.
17. Трехсторонний соединитель трубок – 1 шт.
18. Luer-коннектор – 1 шт.
19. Защитный колпачок – 1 шт.
20. Сливной колпачок - 1 шт.
21. Эксплуатационная документация – 1 шт.
22. Карточка пациента – 1 шт.

17. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч, модель TQ10002 (объем 100 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Luer-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок - 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

18. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч, модель TQ20002 (объем 200 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Luer-коннектор – 1 шт.

14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок - 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

19. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 4/6/8/10 мл/ч, модель TQ20004 (объем 200 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Luer-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок - 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

20. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 6/8/10/12 мл/ч, модель TQ20006 (объем 200 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Luer-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

21. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч, модель TQ30002 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.

5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Luer-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

22. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 4/6/8/10 мл/ч, модель TQ30004 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Luer-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

23. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 6/8/10/12 мл/ч, модель TQ30006 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Luer-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.

16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

24. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч с болюсом, модель ТВ10002 (объем 100 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 01010) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 10111) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 10010) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 10001) – 1 шт.
10. Соединительная трубка (код 10000) – 1 шт.
11. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
12. Соединительная трубка (код 01001) – 1 шт.
13. Крепежный зажим – 1 шт.
14. Фильтр – 1 шт.
15. Болюсное устройство (РСА) (1мл/15 мин, 1мл/30 мин, 2мл/15 мин, 2мл/30 мин) – 1 шт.
16. Регулятор скорости потока – 1 шт.
17. Трехсторонний соединитель трубок – 1 шт.
18. Luer-коннектор – 1 шт.
19. Защитный колпачок – 1 шт.
20. Сливной колпачок - 1 шт.
21. Эксплуатационная документация – 1 шт.
22. Карточка пациента – 1 шт.

25. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч с болюсом, модель ТВ30002 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 01010) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 10111) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 10010) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 10001) – 1 шт.
10. Соединительная трубка (код 10000) – 1 шт.
11. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
12. Соединительная трубка (код 01001) – 1 шт.
13. Крепежный зажим – 1 шт.
14. Фильтр – 1 шт.
15. Болюсное устройство (РСА) (1мл/15 мин, 1мл/30 мин, 2мл/15 мин, 2мл/30 мин) – 1 шт.
16. Регулятор скорости потока – 1 шт.
17. Трехсторонний соединитель трубок – 1 шт.

18. Luer-коннектор – 1 шт.
19. Защитный колпачок – 1 шт.
20. Сливной колпачок – 1 шт.
21. Эксплуатационная документация – 1 шт.
22. Карточка пациента – 1 шт.

26. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 4/6/8/10 мл/ч с болюсом, модель ТВ30004 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 01010) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 10111) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 10010) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 10001) – 1 шт.
10. Соединительная трубка (код 10000) – 1 шт.
11. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
12. Соединительная трубка (код 01001) – 1 шт.
13. Крепежный зажим – 1 шт.
14. Фильтр – 1 шт.
15. Болюсное устройство (РСА) (1мл/15 мин, 1мл/30 мин, 2мл/15 мин, 2мл/30 мин) – 1 шт.
16. Регулятор скорости потока – 1 шт.
17. Трехсторонний соединитель трубок – 1 шт.
18. Luer-коннектор – 1 шт.
19. Защитный колпачок – 1 шт.
20. Сливной колпачок – 1 шт.
21. Эксплуатационная документация – 1 шт.
22. Карточка пациента – 1 шт.

27. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 6/8/10/12 мл/ч с болюсом, модель ТВ30006 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 01010) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 10111) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 10010) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 10001) – 1 шт.
10. Соединительная трубка (код 10000) – 1 шт.
11. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
12. Соединительная трубка (код 01001) – 1 шт.
13. Крепежный зажим – 1 шт.
14. Фильтр – 1 шт.

15. Болюсное устройство (РСА) (1мл/15 мин, 1мл/30 мин, 2мл/15 мин, 2мл/30 мин) – 1 шт.
16. Регулятор скорости потока – 1 шт.
17. Трехсторонний соединитель трубок – 1 шт.
18. Luer-коннектор – 1 шт.
19. Защитный колпачок – 1 шт.
20. Сливной колпачок – 1 шт.
21. Эксплуатационная документация – 1 шт.
22. Карточка пациента – 1 шт.

28. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/5/7/10 мл/ч, модель WF100 (объем 100 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Luer-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

29. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/5/7/10 мл/ч, модель WF200 (объем 200 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Luer-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

30. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/5/7/10 мл/ч, модель WF300 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Лиер-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

31. Помпа инфузионная многоскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 мл/ч, модель UV10001 (объем 100 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Лиер-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

32. Помпа инфузионная многоскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 мл/ч, модель UV20001 (объем 200 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.

7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Лuer-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

33. Помпа инфузионная многоскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 мл/ч, модель UV30001 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Лuer-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

34. Помпа инфузионная многоскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8/10/12/14 мл/ч, модель MG10002 (объем 100 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Лuer-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.

17. Карточка пациента – 1 шт.

35. Помпа инфузионная многоскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8/10/12/14 мл/ч, модель MG20002 (объем 200 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Луег-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

36. Помпа инфузионная многоскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8/10/12/14 мл/ч, модель MG30002 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Луег-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

Далее по тексту: Помпа; Помпа MERIDIAN; инфузионная помпа; медицинское изделие.

Разработчик/производитель медицинского изделия

Meridian Medical Products Ltd
(Меридиан Медикал Продактс Лтд)
Langley House, Park Road, London, N2 8EY, United Kingdom, Великобритания
+447824030918
import.meridian.med@gmail.com

Адрес места производства медицинского изделия

SUZHOU SINOMED CO., LTD
(Суджоу Синомед Ко., ЛТД)
ROOM 501, L.GEM BUSINESS CENTRE, WUZHONG DISTRICT, SUZHOU,
JIANGSU, CHINA, Китай

Уполномоченный представитель производителя

Общество с ограниченной ответственностью «МЕРИДИАН МЕДИКАЛ»
(ООО «МЕРИДИАН МЕДИКАЛ»)
121170, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дорогомилово, пр-кт
Кутузовский, д. 36, стр. 2, этаж 2, помещ. 1, ком. 10
+7 495 987-36-06
info@meridian-med.ru

Классификация медицинского изделия

Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – 2Б

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – 288180

Стерильное, одноразовое медицинское изделие

Вид контакта с организмом пациента (телом человека)

Медицинское изделие, присоединяемое извне, контактирующее со следующими участками организма человека: с системой кровообращения, опосредованный контакт. Категория продолжительности контакта - В (длительный контакт).

Ниже приведены сведения о контакте каждой части изделия:

Наименование части изделия	Контакт с организмом человека¹ (согласно ГОСТ ISO 10993-1-2021)
Тканевая лента	Длительный* прямой контакт с неповрежденной кожей
Защитный корпус	Длительный* прямой контакт с неповрежденной кожей
Крышка корпуса	Длительный* прямой контакт с неповрежденной кожей
Эластичный баллон	Длительный* опосредованный контакт с системой кровообращения

Односторонний клапан (заправочный порт)	Длительный* опосредованный контакт с системой кровообращения ²
Соединительные трубки (все коды соединительных трубок)	Внешняя поверхность - Длительный* прямой контакт с неповрежденной кожей; Внутренняя поверхность - Длительный* опосредованный контакт с системой кровообращения
Крепежный зажим	Длительный* прямой контакт с неповрежденной кожей
Фильтр	Внешняя поверхность - Длительный* прямой контакт с неповрежденной кожей ³ ; Внутренняя поверхность - Длительный опосредованный контакт с системой кровообращения
Болюсное устройство (РСА) (1мл/15 мин, 1мл/30 мин, 2мл/15 мин, 2мл/30 мин)	Внешняя поверхность - Длительный* прямой контакт с неповрежденной кожей; Внутренняя поверхность - Длительный* опосредованный контакт с системой кровообращения
Регулятор скорости потока	Внешняя поверхность - Длительный* прямой контакт с неповрежденной кожей; Внутренняя поверхность - Длительный* опосредованный контакт с системой кровообращения
Трехсторонний соединитель трубок	Внешняя поверхность - Длительный* прямой контакт с неповрежденной кожей; Внутренняя поверхность - Длительный* опосредованный контакт с системой кровообращения
Люер-коннектор	Внешняя поверхность - Длительный* прямой контакт с неповрежденной кожей; Внутренняя поверхность - Длительный* опосредованный контакт с системой кровообращения
Защитный колпачок	Кратковременный** прямой контакт с неповрежденной кожей ⁴
Сливной колпачок	Кратковременный** прямой контакт с неповрежденной кожей ⁴

¹ Данные представлены с учетом оценки риска (т.е. для расчета принимался худший случай – наибольший объем помпы с наименьшей скоростью вливания)

² медперсонал при заправке помпы работает в перчатках. Контакт с кожей медперсонала нет.

³ для внешней части, контакт с неповрежденной кожей пациента

⁴ рассмотрено для худшего случая (персонал работает в перчатках, контакта с кожей медперсонала нет).

* Согласно ГОСТ ISO 10993-1-2021 п. 5.3.1, медицинские изделия подразделяют в зависимости от продолжительности контакта на следующие категории:

а) категория А – МИ кратковременного контакта – общая продолжительность однократного, многократного или непрерывного воздействия которых составляет не более 24 ч;

б) категория В – МИ длительного контакта – общая продолжительность однократного, многократного или непрерывного воздействия которых превышает 24 ч, но не более 30 сут.

Пояснение: для самого большого объема помпы 300 мл и самой низкой скорости введения 1 мл/ч длительность контакта некоторых частей МИ с организмом человека составляет 300 часов, т.е. 12,5 сут., т.о. контакт для этих частей МИ классифицируется как категория В.

** Пояснение: для защитного и сливного колпачков в составе МИ контакт происходит только на момент подключения МИ пациенту медицинским персоналом, либо дренирования жидкости при необходимости. Общая длительность манипуляций менее 24 ч., т.о. контакт для этих частей в составе МИ классифицируется как категория А.

Применение по назначению

Предназначена для проведения непрерывного вливания пациенту жидких лекарственных средств в вену в виде инфузии с заданной скоростью. Продолжительность введения лекарственного средства при заданной скорости, определяется максимальным объемом помпы.

Принцип действия

Помпа инфузионная MERIDIAN приводится в действие растягивающей нагрузкой на силикон эластичного баллона что позволяет достичь ограничения капиллярного потока для выполнения безопасной, эффективной и однородной инфузии. Помпа имеет в составе силиконовый баллон, в котором может находиться жидкость, обладающий упругой силой. Трубка с одной стороны снабжена односторонним портом для заполнения: это устройство представляет собой Luer-коннектор с конусностью 6 %, что обеспечивает возможность введения лекарственного препарата шприцем. Выпускное отверстие для жидкости снабжено конусным соединением 6 %, что позволяет подключение других инфузионных устройств для введения жидкости.

Продукты, предназначенные для введения

Помпа MERIDIAN предназначена для проведения непрерывного вливания жидких лекарственных средств в вену пациента.

Предполагаемые пользователи, условия применения

Помпа MERIDIAN предназначена для использования в лечебных учреждениях и в амбулаторной практике только под контролем медицинского персонала (например, врача, фельдшера, медицинской сестры, имеющих навыки обращения с подобными медицинскими устройствами для проведения инфузий)

Использование данного медицинского изделия неквалифицированным пользователем не допускается.

Показания к применению, предполагаемые пациенты

Помпа MERIDIAN показана для проведения непрерывного вливания жидких лекарственных средств с заданной скоростью в вену пациента.

Предполагаемые пациенты – взрослые и дети с 14 лет.

Противопоказания

1. Это изделие не предназначено для инфузии крови, препаратов крови, липидов, жировых эмульсий или полного парентерального питания (ППП). Помпы не предназначены для введения густых вязких жидкостей или суспензий.

2. Запрещено к применению людям с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе (отек Квинке, бронхоспазм), или страдающим нарушениями функций

органов дыхания, тяжелыми нарушениями функции кровообращения, пациентам в шоковом состоянии. Следует соблюдать осторожность при применении у пациентов с сильными болями, где есть угроза потери сознания, у пожилых людей, у пациентов, страдающих эпилепсией.

3. Это изделие не предназначено для внутримышечных инъекций и введения жидкости в полости.

4. Для новорожденных, детей младшего возраста (до 14 лет), а также лиц, которые не обладают достаточными физическими и умственными способностями, необходимыми для регулирования и/или управления скоростью инфузии, следует использовать другие медицинские изделия для проведения инфузионной терапии.

Ожидаемые и предсказуемые побочные эффекты, связанные с применением медицинского изделия по назначению

Нежелательные явления при применении помп могут быть связаны исключительно с неправильным применением медицинского изделия, а также в связи с нарушением стерильности (например, в случае несоблюдения мер гигиены медицинским персоналом при проведении установки/обслуживания медицинского изделия, в случае нарушения целостности упаковки). Риск неправильного применения должен быть минимизирован соблюдением мер предосторожности (см. Раздел «Меры предосторожности»).

Возможны следующие нежелательные явления:

- введение меньшей или большей дозы, чем задано;
- превышение или замедление скорости введения препарата;
- попадание воздуха в вену, механические повреждения, которые могут быть связаны с нарушениями техники инъекции или смещением устройства у пациента;
- Если нарушена стерильность изделия, у пациента может возникнуть бактериальная инфекция, лихорадка, головокружение, симптомы токсикоза, в серьезных случаях шок.

Риски применения медицинского изделия

Процедура управления рисками в отношении помпы основана на ISO 14971. Цель оценки риска заключалась в анализе и последующем снижении числа опасных ситуаций. После применения мер по контролю риска все опасные ситуации были сведены к минимуму, а общий остаточный риск был приемлемым.

Испытания эксплуатационной пригодности помпы в отношении риска неправильного применения соответствуют ГОСТ Р МЭК 62366. Можно сделать вывод, что помпа MERIDIAN соответствует требованиям по эксплуатационной пригодности согласно ГОСТ Р МЭК 62366.

Сведения о совместимых медицинских изделиях, а также описание принадлежностей, или изделий, не являющихся медицинскими, но предусмотренные для использования в комбинации с данным медицинским изделием

Для проведения инфузий помпа используется вместе с:

- шприцем, который используется для заполнения помпы через заправочный порт. Можно использовать любой подходящий одноразовый шприц с разъемом Luer. Рекомендуется использовать шприцы большого объема, например от 60 мл до 150 мл.
- катетером внутривенным или иглой Губера любого типа. У всех устройств должен быть тип соединения Luer. Можно использовать любые подходящие соответствующие устройства.

Описание медицинского изделия

Предназначена для проведения непрерывного вливания пациенту жидких лекарственных средств в вену в виде инфузии с заданной скоростью.

Продолжительность введения лекарственного средства при заданной скорости, определяется максимальным объемом помпы.

Назначение изделий, входящих в состав вариантов исполнения регистрируемого медицинского изделия

Изделие, входящее в состав вариантов исполнения регистрируемого медицинского изделия	Назначение, предусмотренное производителем
Тканевая лента	Предназначена для удобства ношения помпы пациентом, надевается на шею
Защитный корпус	Предназначен для защиты эластомерного баллона помпы от внешней среды и обеспечения стерильности
Крышка корпуса	Предназначена для защиты эластомерного баллона помпы от внешней среды и обеспечения стерильности
Эластичный баллон	Предназначен для выполнения непрерывной однородной инфузии
Соединительные трубки (все коды)	Соединяют части помпы между собой для её функционирования
Односторонний клапан (заправочный порт)	Предназначен для наполнения помпы лекарственным препаратом для инфузии.
Крепежный зажим	Предназначен для остановки подачи раствора.
Фильтр	Предназначен для устранения воздушных пузырьков и механических частиц перед введением раствора пациенту.

Болюсное устройство (РСА)	Предназначено для возможности введения определенного объема лекарственного препарата через определенный промежуток времени.
Регулятор скорости потока	Предназначен для настройки скорости инфузии.
Трехсторонний соединитель трубок	Предназначен для соединения трубок, выходящих от регулятора скорости и от болюсного устройства в одну трубку, которая заканчивается Luer-коннектором.
Luer-коннектор	Предназначен для соединения с иглой Губера, либо внутривенным катетером, установленным у пациента. <i>Примечание: игла Губера и внутривенный катетер не входят в комплект поставки данного медицинского изделия</i>
Защитный колпачок	Предназначен для закрытия системы с целью поддержки стерильности до момента подключения к пациенту, либо при временном отсоединении помпы.
Сливной колпачок	Предназначен для возможности слива жидкости из системы при поддержке стерильности.
Эксплуатационная документация	Предназначена для ознакомления потребителя с конструкцией помпы, содержит регламентирующие условия и правила эксплуатации (использование по назначению, хранение и транспортировка), гарантированные производителем значения основных параметров, характеристик (свойств), гарантийные обязательства, сведения о её утилизации.
Карточка пациента	Служит для удобства идентификации помпы, заправленной лекарственным препаратом. В карточке указывают данные пациента (ФИО или код/номер карты), возраст, время начала инфузии, лекарственный препарат. Карточка заполняется медицинским персоналом до начала инфузии и может быть наклеена на защитный корпус помпы.

Технические характеристики медицинского изделия

1. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 2 мл/ч, модель CP10002 (объем 100 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 00101) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.
11. Luer-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.
14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.

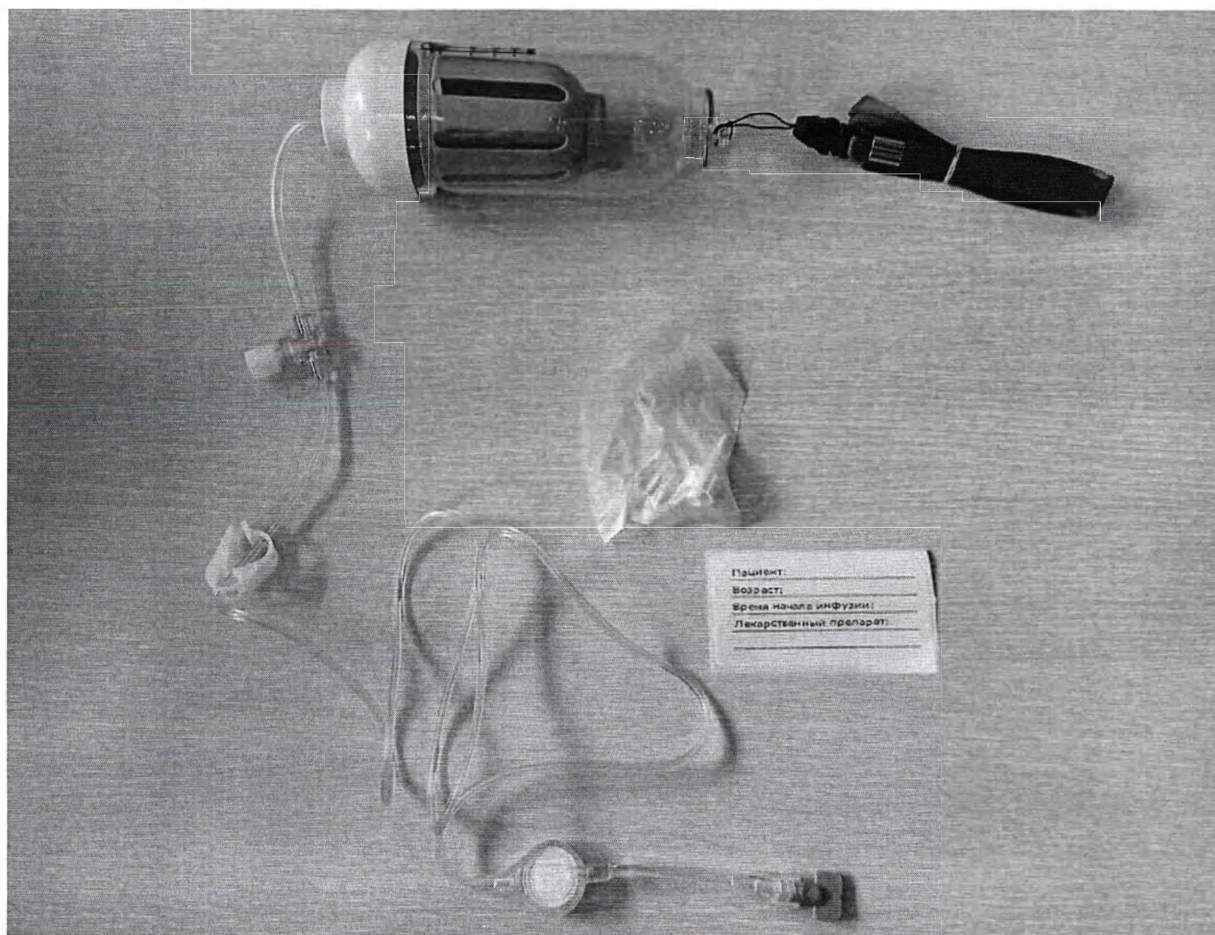


Рисунок. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 2 мл/ч, модель CP10002 (объем 100 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 2 мл/ч, модель CP10002 (объем 100 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 51 мм ± 10% x 122 мм ± 10% 33,1 г ± 10%
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 51 мм ± 10% x 35 мм ± 10% 9,4 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	100 см ³ ± 10 см ³ Ø13 мм ± 10 % x 98 мм ± 10 % 12,6 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00010) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00101) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 620 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,08 мм ± 10% 45 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилении надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Люер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 (±2) мм 8 (±2) мм 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

2. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 4 мл/ч, модель CP10004 (объем 100 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 00110) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.
11. Luer-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.
14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.

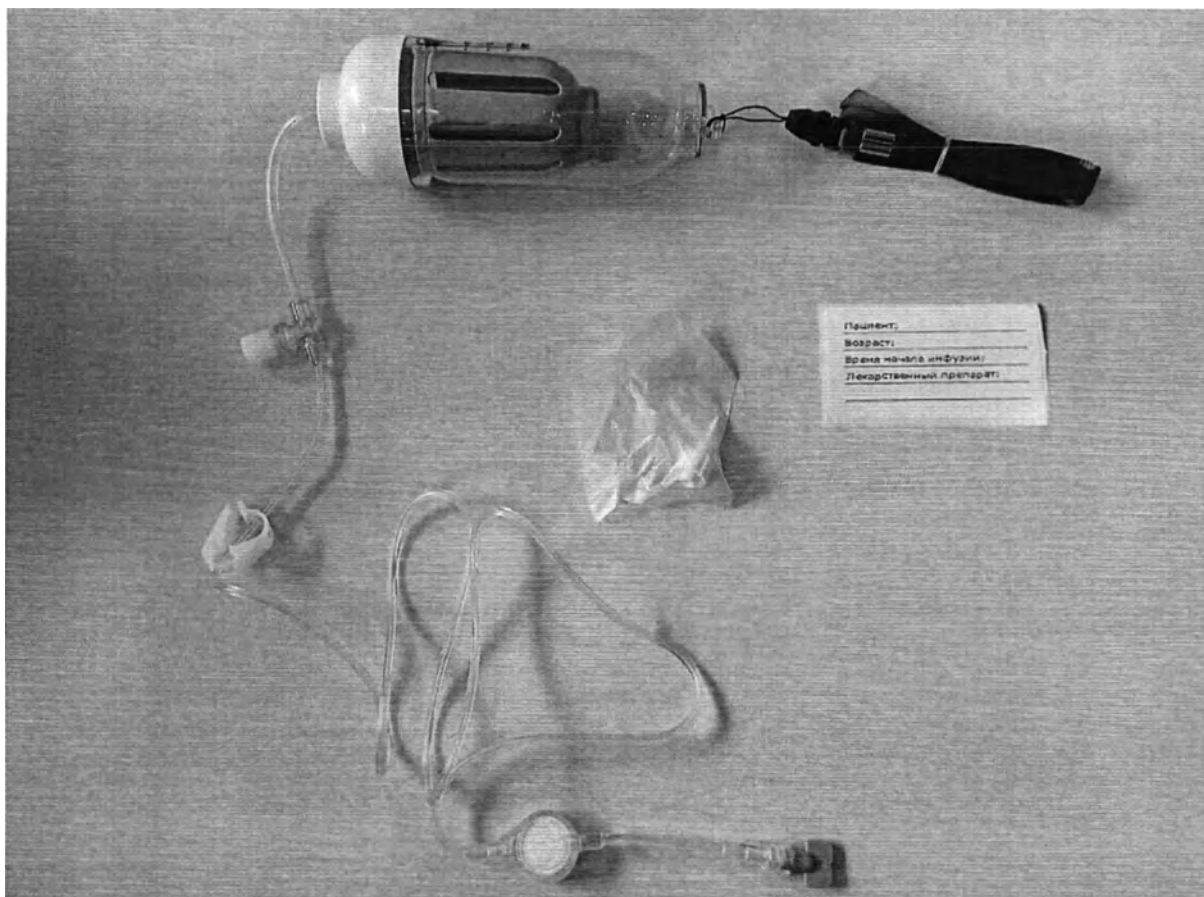


Рисунок. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 4 мл/ч, модель CP10004 (объем 100 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 4 мл/ч, модель CP10004 (объем 100 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 51 мм ± 10% x 122 мм ± 10% 33,1 г ± 10%
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 51 мм ± 10% x 35 мм ± 10% 9,4 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	100 см ³ ± 10 см ³ Ø13 мм ± 10 % x 98 мм ± 10 % 12,6 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00010) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00110) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 620 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,10 мм ± 10% 43 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Лигер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 (±2) мм 8 (±2) мм 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

3. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 5 мл/ч, модель CP10005 (объем 100 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 00111) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.
11. Luer-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.
14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.

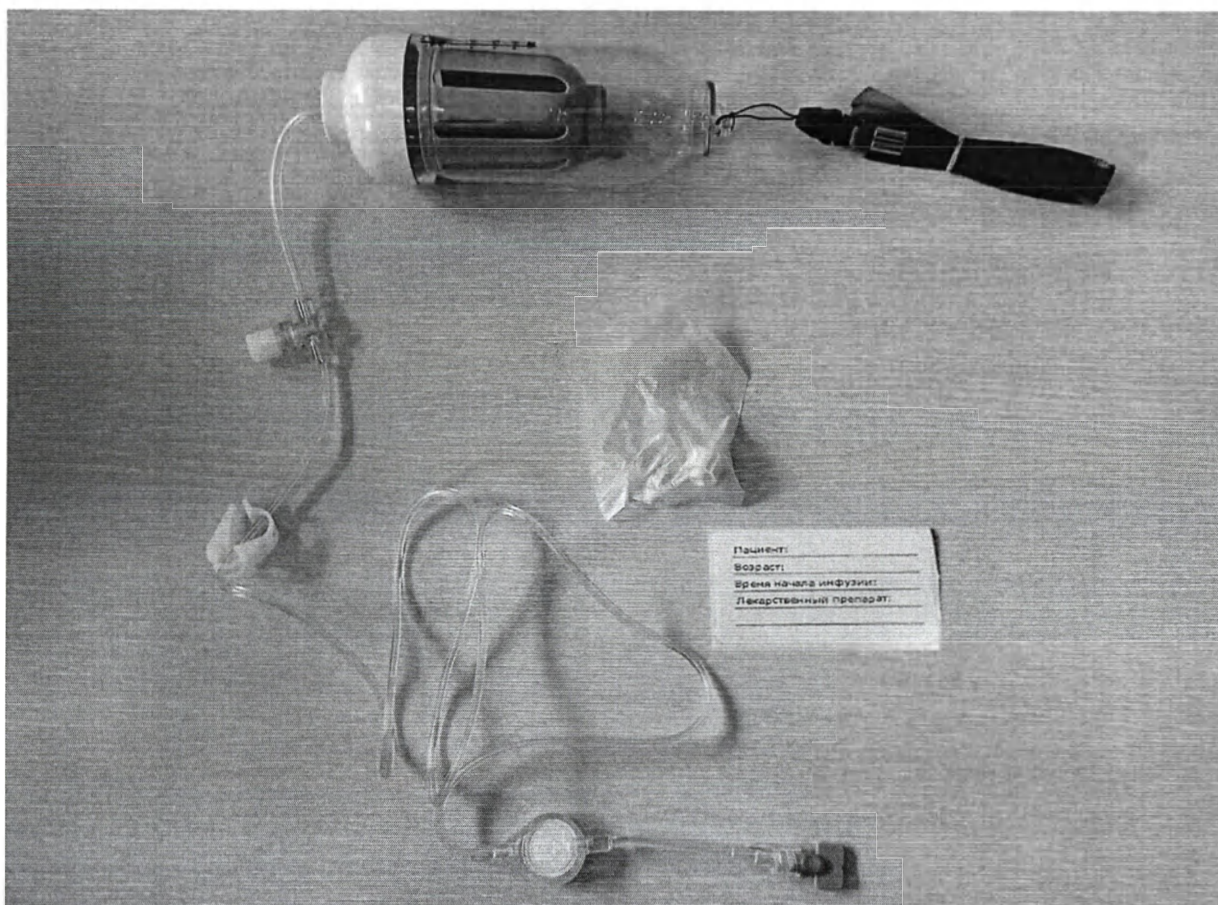


Рисунок. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 5 мл/ч, модель CP10005 (объем 100 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 5 мл/ч, модель CP10005 (объем 100 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 51 мм ± 10% x 122 мм ± 10% 33,1 г ± 10%
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 51 мм ± 10% x 35 мм ± 10% 9,4 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	100 см ³ ± 10 см ³ Ø13 мм ± 10 % x 98 мм ± 10 % 12,6 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00010) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 620 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,1 мм ± 10% 41 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Лигер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 (±2) мм 8 (±2) мм 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

4. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 2 мл/ч, модель CP20002 (объем 200 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 00101) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.
11. Luer-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.
14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.

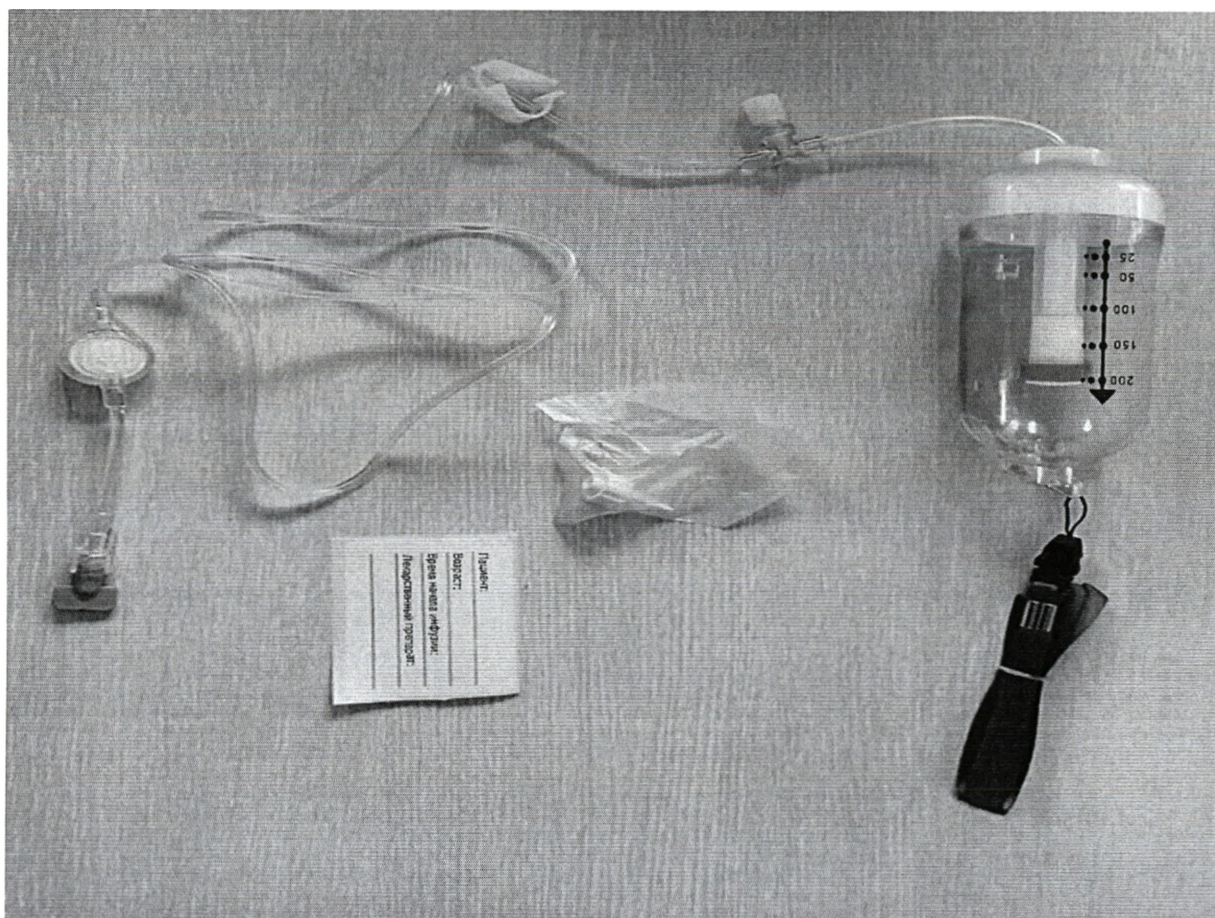


Рисунок. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 2 мл/ч, модель CP20002 (объем 200 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 2 мл/ч, модель CP20002 (объем 200 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 64 мм ± 10% x 125 мм ± 10% 52,2 г ± 10 г
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 64 мм ± 10 % x 42 мм ± 10 % 19,5 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	200 см ³ ± 25 см ³ Ø16 мм ± 10% x 114 мм ± 10% 22,3 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00010) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00101) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 620 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,08 мм ± 10% 45 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Лuer-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 (±2) мм 8 (±2) мм 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

5. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 4 мл/ч, модель CP20004 (объем 200 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 00110) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.
11. Luer-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.
14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.



Рисунок. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 4 мл/ч, модель CP20004 (объем 200 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 4 мл/ч, модель CP20004 (объем 200 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 64 мм ± 10% x 125 мм ± 10% 52,2 г ± 10 г
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 64 мм ± 10 % x 42 мм ± 10 % 19,5 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	200 см ³ ± 25 см ³ Ø16 мм ± 10% x 114 мм ± 10% 22,3 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00010) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00110) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 620 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,10 мм ± 10% 43 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Лuer-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 (±2) мм 8 (±2) мм 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

6. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 5 мл/ч, модель CP20005 (объем 200 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 00111) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.
11. Luer-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.
14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.

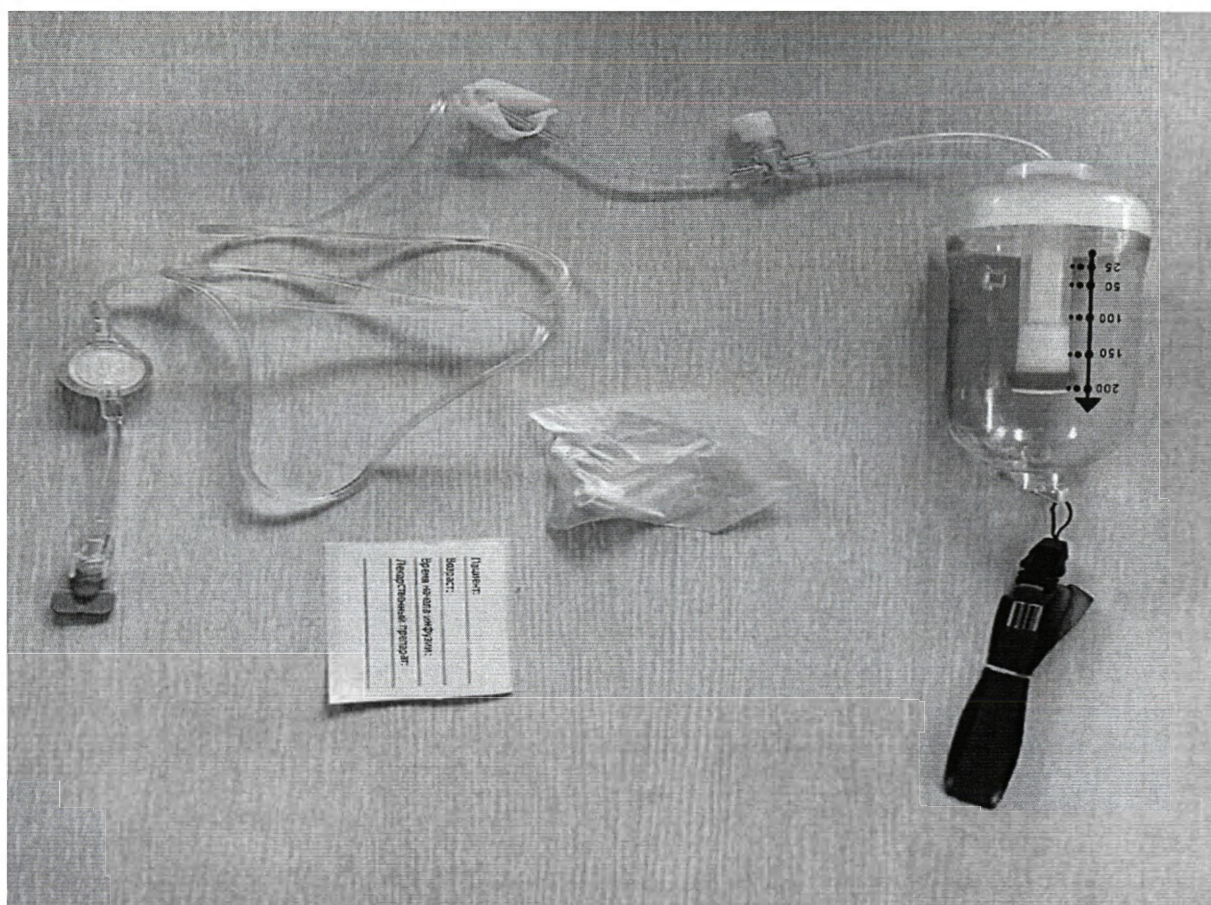


Рисунок. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 5 мл/ч, модель CP20005 (объем 200 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 5 мл/ч, модель CP20005 (объем 200 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 64 мм ± 10% x 125 мм ± 10% 52,2 г ± 10 г
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 64 мм ± 10 % x 42 мм ± 10 % 19,5 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	200 см ³ ± 25 см ³ Ø16 мм ± 10% x 114 мм ± 10% 22,3 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00010) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 620 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,1 мм ± 10% 41 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Luер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 (±2) мм 8 (±2) мм 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

7. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 2 мл/ч, модель CP30002 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 00101) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.
11. Луер-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.
14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.

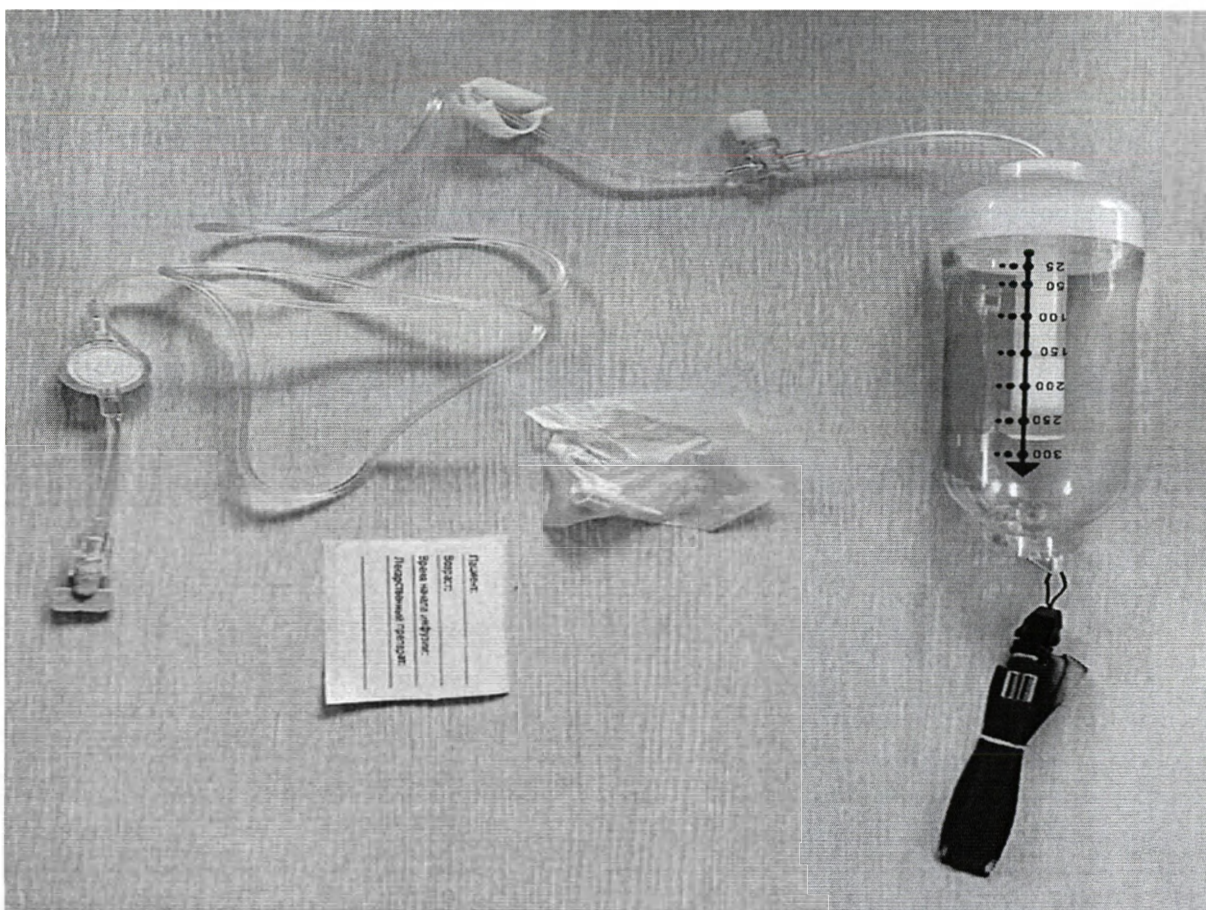


Рисунок. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 2 мл/ч, модель CP30002 (объем 300 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 2 мл/ч, модель CP30002 (объем 300 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 64 мм ± 10% x 153 мм ± 10% 62,4 г ± 10 %
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 64 мм ± 10 % x 42 мм ± 10 % 19,5 г ± 10%
Эластичный баллон Объём Габаритные размеры Масса	300 см ³ ± 25 см ³ Ø16 мм ± 10% x 114 мм ± 10% 22,3 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00010) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00101) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 620 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,08 мм ± 10% 45 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Лигер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 (±2) мм 8 (±2) мм 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

8. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 4 мл/ч, модель CP30004 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 00110) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.
11. Лиер-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.
14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.

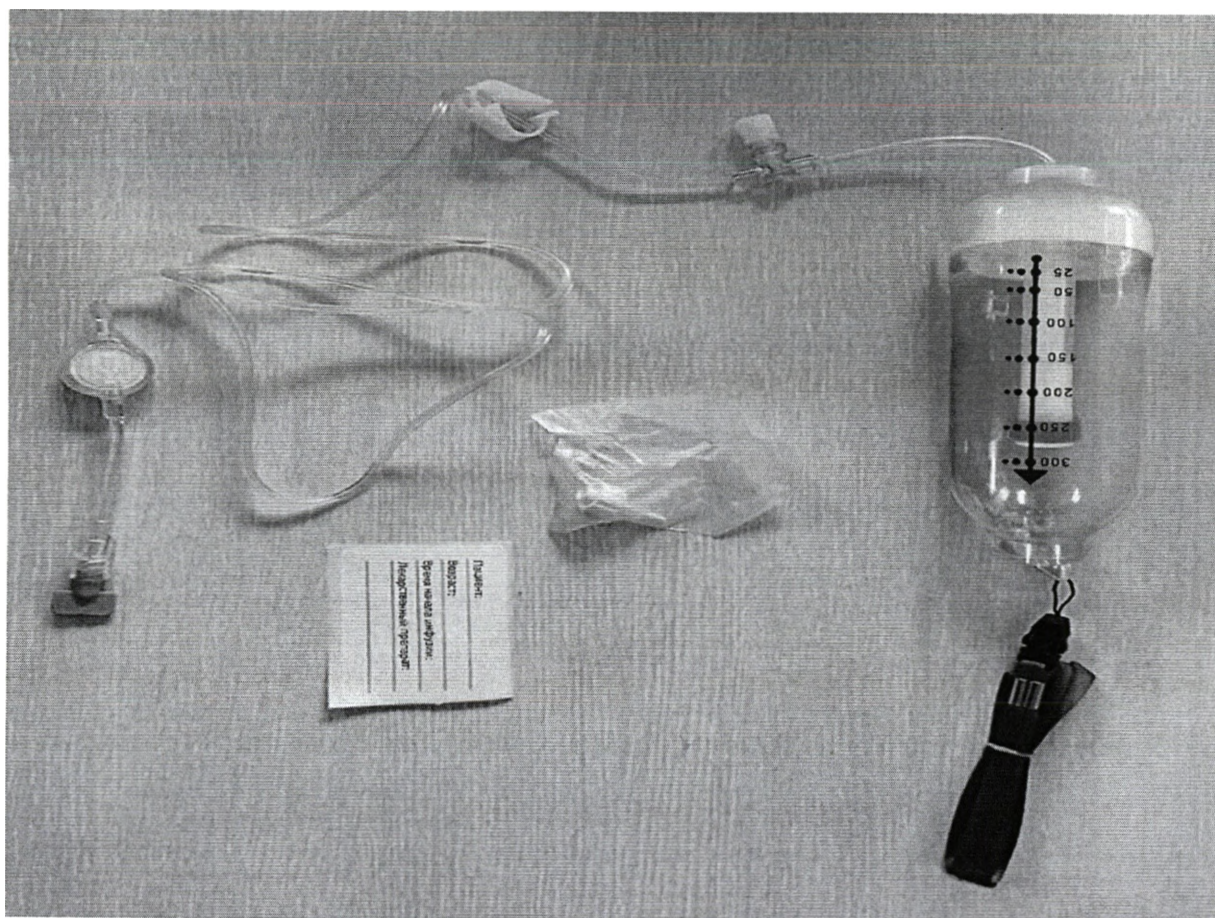


Рисунок. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 4 мл/ч, модель CP30004 (объем 300 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 4 мл/ч, модель CP30004 (объем 300 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 64 мм ± 10% x 153 мм ± 10% 62,4 г ± 10 %
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 64 мм ± 10 % x 42 мм ± 10 % 19,5 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	300 см ³ ± 25 см ³ Ø16 мм ± 10% x 114 мм ± 10% 22,3 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00010) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00110) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 620 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,10 мм ± 10% 43 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Лигер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 (±2) мм 8 (±2) мм 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

9. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 5 мл/ч, модель CP30005 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 00111) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.
11. Luer-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.
14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.

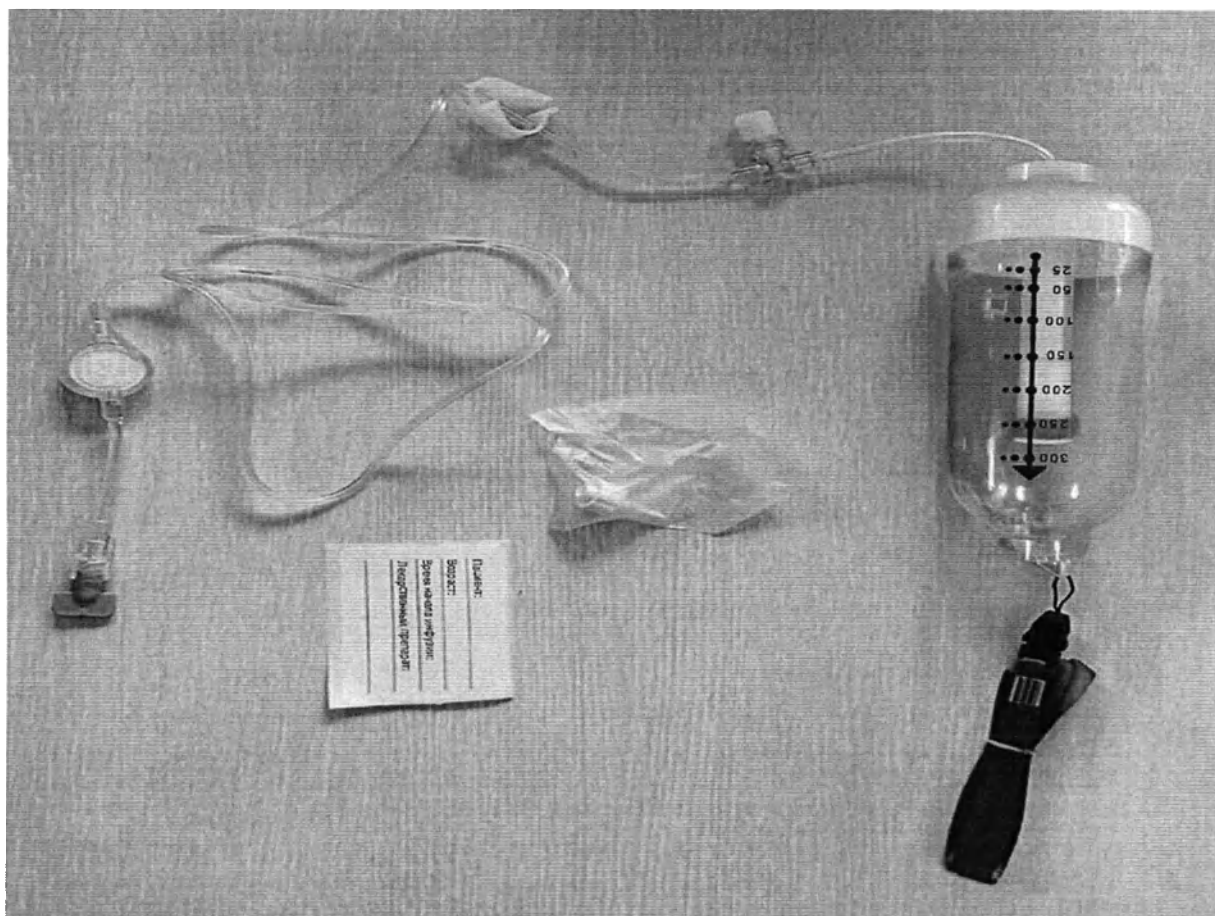


Рисунок. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 5 мл/ч, модель CP30005 (объем 300 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 5 мл/ч, модель CP30005 (объем 300 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 64 мм ± 10% x 153 мм ± 10% 62,4 г ± 10 %
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 64 мм ± 10 % x 42 мм ± 10 % 19,5 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	300 см ³ ± 25 см ³ Ø16 мм ± 10% x 114 мм ± 10% 22,3 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00010) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 620 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,1 мм ± 10% 41 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Лuer-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 (±2) мм 8 (±2) мм 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 2 мл/ч, модель SA10002 (объем 100 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	102 мм ± 10% x 92 мм x ± 10% 4,5 г ± 10 %
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 24 мм ± 10 % x 17 мм ± 10 % 2,1 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	100 см ³ ± 10 см ³ Ø13 мм ± 10% x 98 мм ± 10% 12,6 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00010) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00101) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 620 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,08 мм ± 10% 45 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Luер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 (±2) мм 8 (±2) мм 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

11. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 5 мл/ч, модель SA40005 (объем 400 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 2 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.:
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 00111) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.
11. Luer-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.
14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.

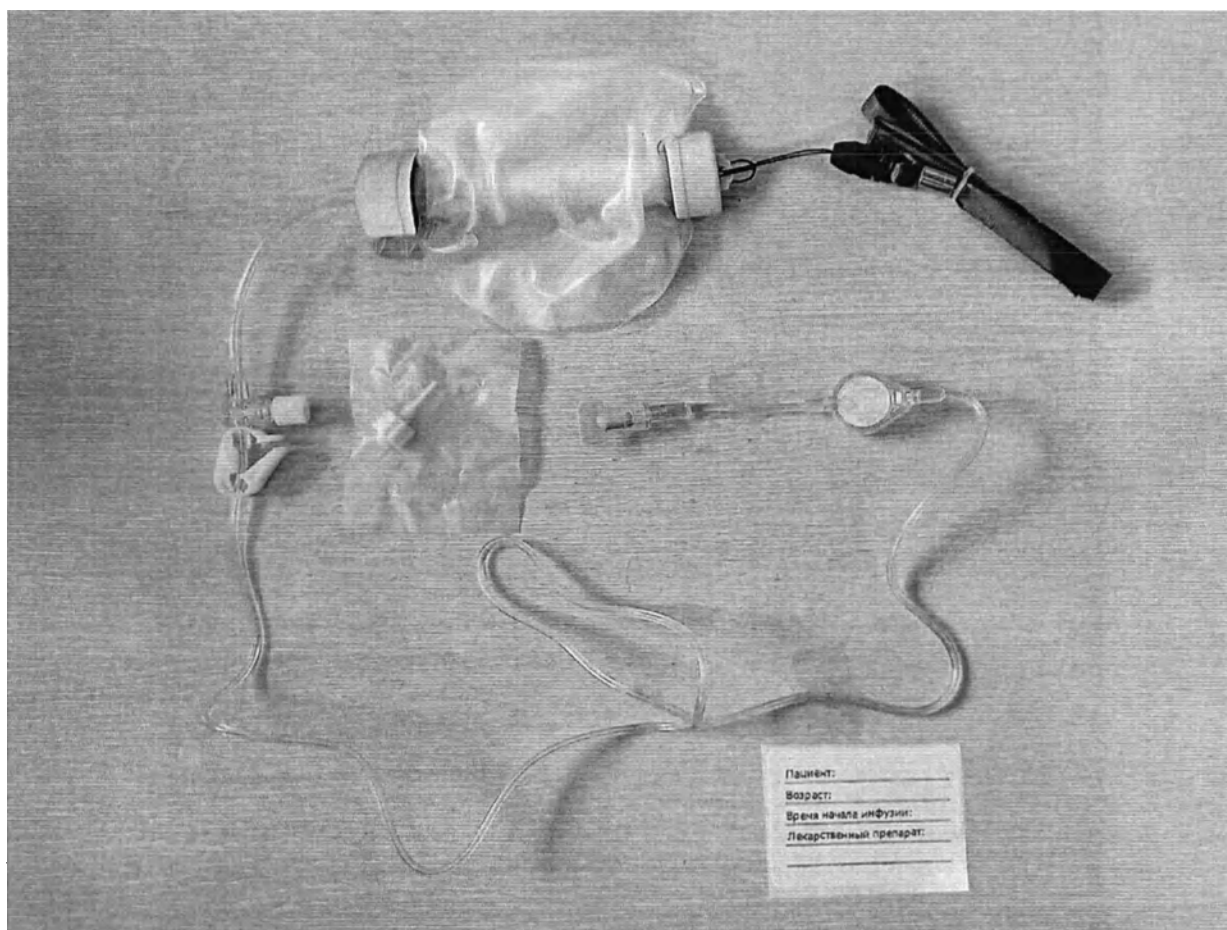


Рисунок. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 5 мл/ч, модель SA40005 (объем 400 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 5 мл/ч, модель SA40005 (объем 400 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	175 мм ± 10% x 151 мм x ± 10% 11,4 г ± 10 %
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 35 мм ± 10 % x 20 мм ± 10 % 4,7 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	400 см ³ ± 25 см ³ Ø21 мм ± 10% x 116 мм ± 10% 33,9 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00010) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 620 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,1 мм ± 10% 41 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Лигер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 (±2) мм 8 (±2) мм 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

12. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 10 мл/ч, модель SA40010 (объем 400 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 2 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01000) – 1 шт.
9. Крепежный зажим – 1 шт.
10. Фильтр – 1 шт.
11. Luer-коннектор – 1 шт.
12. Защитный колпачок – 1 шт.
13. Сливной колпачок – 1 шт.
14. Эксплуатационная документация – 1 шт.
15. Карточка пациента – 1 шт.

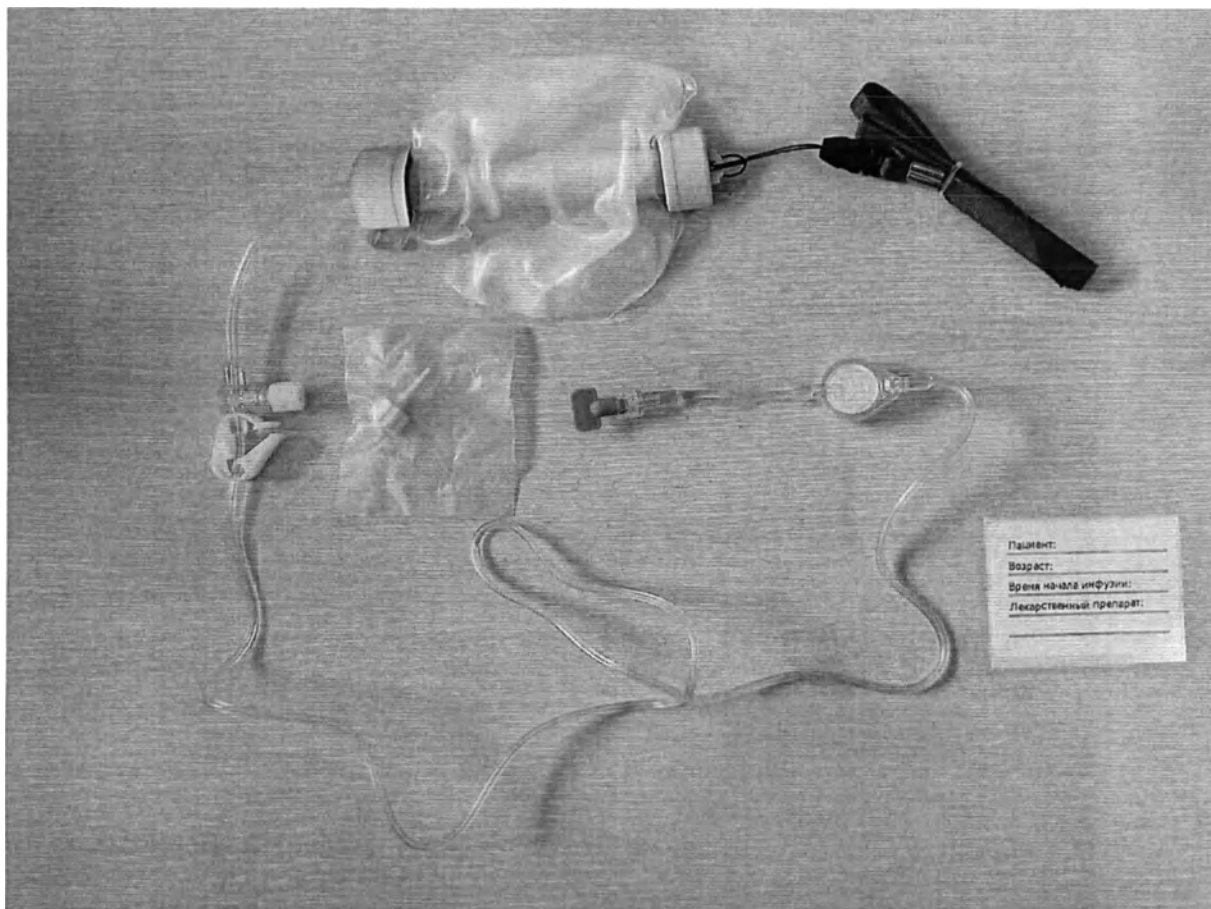


Рисунок. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 10 мл/ч, модель SA40010 (объем 400 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 10 мл/ч, модель SA40010 (объем 400 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	175 мм ± 10% x 151 мм x ± 10% 11,4 г ± 10 %
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 35 мм ± 10 % x 20 мм ± 10 % 4,7 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	400 см ³ ± 25 см ³ Ø21 мм ± 10% x 116 мм ± 10% 33,9 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 00010) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительная трубка (код 01000) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 620 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,12 мм ± 10% 40 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Люер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 (±2) мм 8 (±2) мм 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной четырехскоростной MERIDIAN со скоростью вливания модель 1/2/3/4 мл/ч, FO10001 (объем 100 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 51 мм ± 10% x 122 мм ± 10% 33,1 г ± 10 %
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 51 мм ± 10 % x 35 мм ± 10 % 9,4 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	100 см ³ ± 10 см ³ Ø13 мм ± 10% x 98 мм ± 10% 12,6 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 00010, 01011, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно)	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 1028 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	1-2-3-4 мл/ч (100 x 38 x 15) мм ± 5% 21 г ± 5%
Лигер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 (±2) мм 8 (±2) мм 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

14. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4 мл/ч, модель FO20001 (объем 200 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Люер-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок - 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

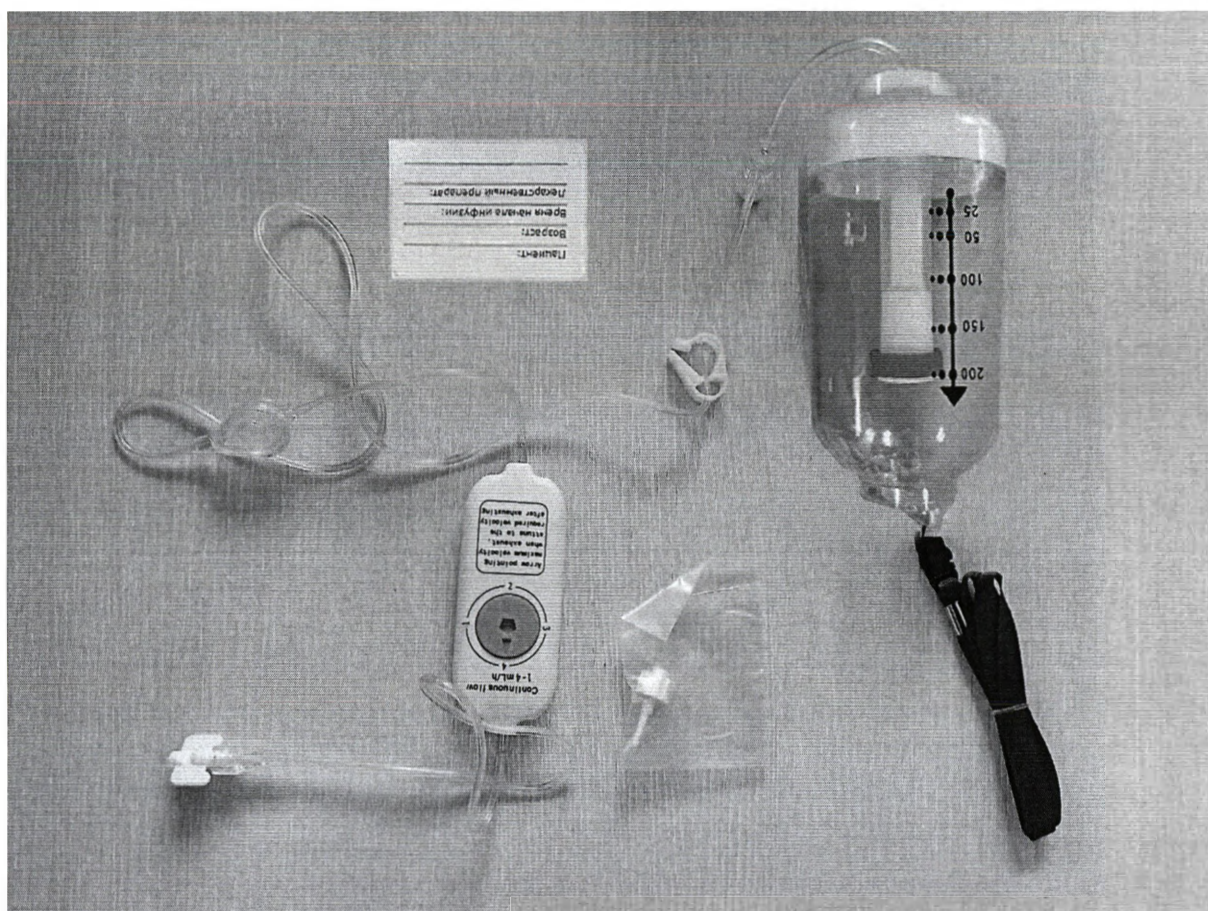


Рисунок. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4 мл/ч, модель FO20001 (объем 200 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной четырехскоростной MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4 мл/ч, модель FO20001 (объем 200 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 64 мм ± 10% x 125 мм ± 10% 52,2 г ± 10 %
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 64 мм ± 10 % x 42 мм ± 10 % 19,5 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	200 см ³ ± 25 см ³ Ø16 мм ± 10% x 114 мм ± 10% 22,3 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 00010, 01011, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно)	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 1028 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилении надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	1-2-3-4 мл/ч (100 x 38 x 15) мм ± 5% 21 г ± 5%
Лигер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 (±2) мм 8 (±2) мм 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

15. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4 мл/ч, модель FO30001 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Луер-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок - 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

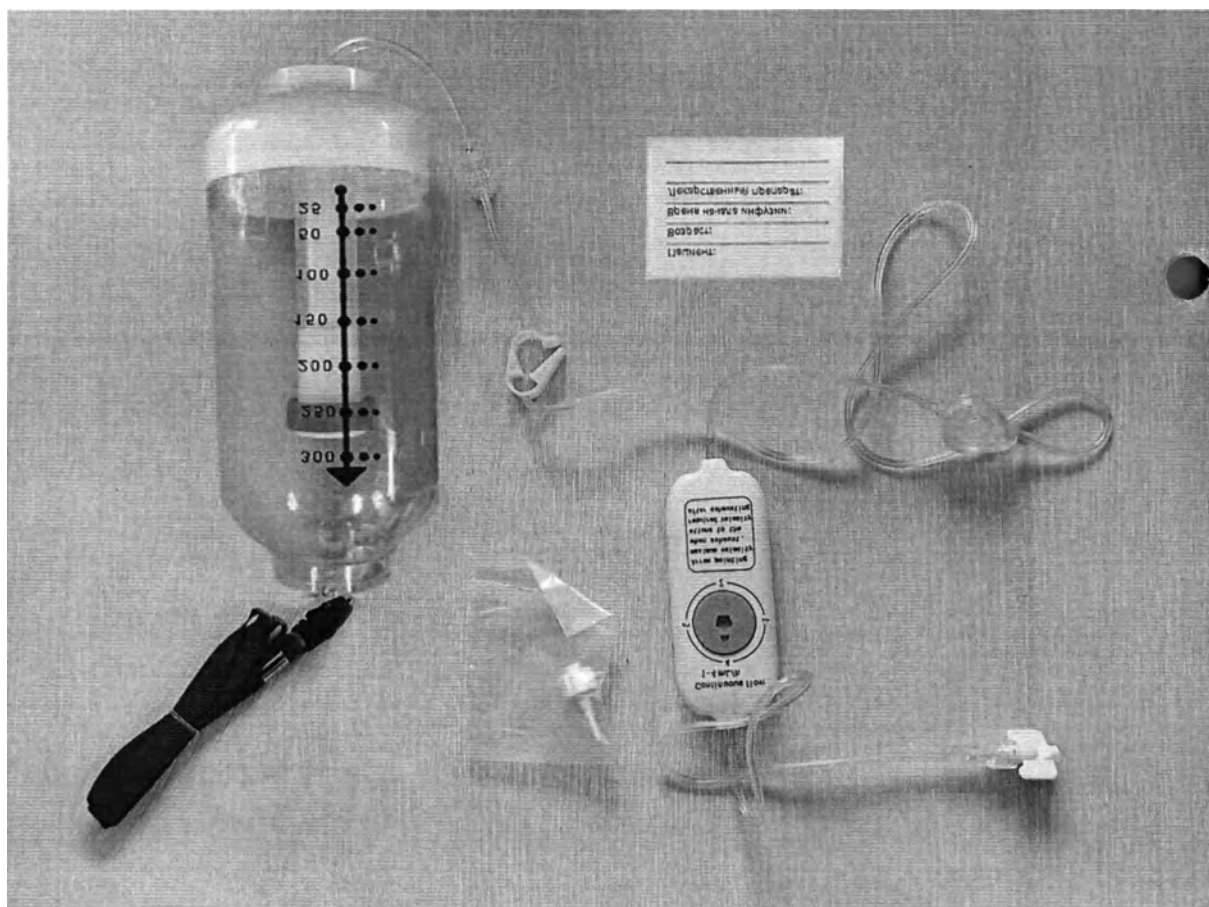


Рисунок. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4 мл/ч, модель FO30001 (объем 300 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной четырехскоростной MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4 мл/ч, модель FO30001 (объем 300 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 64 мм ± 10% x 153 мм ± 10% 62,4 г ± 10 %
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 64 мм ± 10 % x 42 мм ± 10 % 19,5 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	300 см ³ ± 25 см ³ Ø16 мм ± 10% x 114 мм ± 10% 22,3 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 00010, 01011, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно)	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 1028 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	1-2-3-4 мл/ч (100 x 38 x 15) мм ± 5% 21 г ± 5%
Лигер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 (±2) мм 8 (±2) мм 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

16. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4 мл/ч, с болюсом, модель FB10001 (объем 100 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 01010) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 10111) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 10010) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 10001) – 1 шт.
10. Соединительная трубка (код 10000) – 1 шт.
11. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
12. Соединительная трубка (код 01001) – 1 шт.
13. Крепежный зажим – 1 шт.
14. Фильтр – 1 шт.
15. Болюсное устройство (РСА) (1мл/15 мин, 1мл/30 мин, 2мл/15 мин, 2мл/30 мин) – 1 шт.
16. Регулятор скорости потока – 1 шт.
17. Трехсторонний соединитель трубок – 1 шт.
18. Люер-коннектор – 1 шт.
19. Защитный колпачок – 1 шт.
20. Сливной колпачок - 1 шт.
21. Эксплуатационная документация – 1 шт.
22. Карточка пациента – 1 шт.



Рисунок. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4 мл/ч, с болюсом, модель FB10001 (объем 100 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной четырехскоростной MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4 мл/ч, с болюсом, модель FB10001 (объем 100 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 51 мм ± 10% x 122 мм ± 10% 33,1 г ± 10 %
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 51 мм ± 10 % x 35 мм ± 10 % 9,4 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	100 см ³ ± 10 см ³ Ø13 мм ± 10 % x 98 мм ± 10% 12,6 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 01010) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 10111, 10010, 10001, 10000, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно) - Соединительная трубка (код 01001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 80 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 887 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,09 мм ± 10% 97 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	1-2-3-4 мл/ч (100 x 38 x 15) мм ± 5% 21 г ± 5%
Болюсное устройство (РСА) Режимы работы Усилие нажатия на кнопку введения Габаритные размеры Масса	1мл/15 мин, 1мл/30 мин, 2мл/15 мин, 2мл/30 мин 6 Н ± 2 Н (46 x 60 x 18) мм ± 5% 18 г ± 5%
Трехсторонний соединитель трубок Масса	0,75 г ± 5%

Наименование	Значение
Luер-коннектор	
Диаметр малого основания наружного конуса	6 мм ± 5 %
Диаметр большого основания внутреннего конуса	10 мм ± 5 %
Длина наружного конуса	26,5 мм ± 5 %
Длина внутреннего конуса	7,5 мм ± 5 %
Внешний диаметр замка	10 мм ± 5%
Внутренний диаметр замка	8 мм ± 5%
Конусность	6%
Защитный колпачок	
Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок	
Масса	0,738 г ± 10%
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

17. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч, модель TQ10002 (объем 100 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Лиер-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок - 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.



Рисунок. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч, модель TQ10002 (объем 100 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной четырехскоростной MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч, модель TQ10002 (объем 100 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом)	
Габаритные размеры	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5%
Масса	5 г ± 10 %

Наименование	Значение
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	$\varnothing 51 \text{ мм} \pm 10\% \times 122 \text{ мм} \pm 10\%$ $33,1 \text{ г} \pm 10\%$
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	$\varnothing 51 \text{ мм} \pm 10\% \times 35 \text{ мм} \pm 10\%$ $9,4 \text{ г} \pm 10\%$
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	$100 \text{ см}^3 \pm 10 \text{ см}^3$ $\varnothing 13 \text{ мм} \pm 10\% \times 98 \text{ мм} \pm 10\%$ $12,6 \text{ г} \pm 10\%$
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	$2 \text{ г} \pm 10\%$
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 00010, 01011, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно)	$\varnothing 4,0 \text{ мм} \pm 10\%$ $\varnothing 2,0 \text{ мм} \pm 10\%$ $88 \text{ мм} \pm 10\%$ $\varnothing 3,0 \text{ мм} \pm 10\%$ $\varnothing 0,6 \text{ мм} \pm 10\%$ $1028 \text{ мм} \pm 10\%$
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	$25 \text{ Н} \pm 8 \text{ Н}$ $(10 \times 20 \times 28) \text{ мм} \pm 10\%$ $1 \text{ г} \pm 10\%$
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более $1,2 \text{ мкм}$ $(50 \times 22 \times 8) \text{ мм} \pm 10\%$ $3 \text{ г} \pm 10\%$
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	$2-4-6-8 \text{ мл/ч}$ $(100 \times 38 \times 15) \text{ мм} \pm 5\%$ $21 \text{ г} \pm 5\%$
Лиер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	$6 \text{ мм} \pm 5\%$ $10 \text{ мм} \pm 5\%$ $26,5 \text{ мм} \pm 5\%$ $7,5 \text{ мм} \pm 5\%$ $10 \text{ мм} \pm 5\%$ $8 \text{ мм} \pm 5\%$ 6%
Защитный колпачок Масса	$0,675 \text{ г} \pm 10\%$
Сливной колпачок Масса	$0,738 \text{ г} \pm 10\%$
Индивидуальная упаковка Габаритные размеры Масса	$320 \text{ мм} \pm 10\% \times 190 \text{ мм} \pm 10\%$ $9 \text{ г} \pm 10\%$

18. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч, модель TQ20002 (объем 200 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Лиерг-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок - 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.



Рисунок. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч, модель TQ20002 (объем 200 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной четырехскоростной MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч, модель TQ20002 (объем 200 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 64 мм ± 10% x 125 мм ± 10% 52,2 г ± 10 г
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 64 мм ± 10 % x 42 мм ± 10 % 19,5 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	200 см ³ ± 25 см ³ Ø16 мм ± 10% x 114 мм ± 10% 22,3 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 00010, 01011, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно)	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 1028 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	2-4-6-8 мл/ч (100 x 38 x 15) мм ± 5% 21 г ± 5%
Люер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 мм ± 5% 8 мм ± 5% 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

19. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 4/6/8/10 мл/ч, модель TQ20004 (объем 200 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Луер-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок - 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

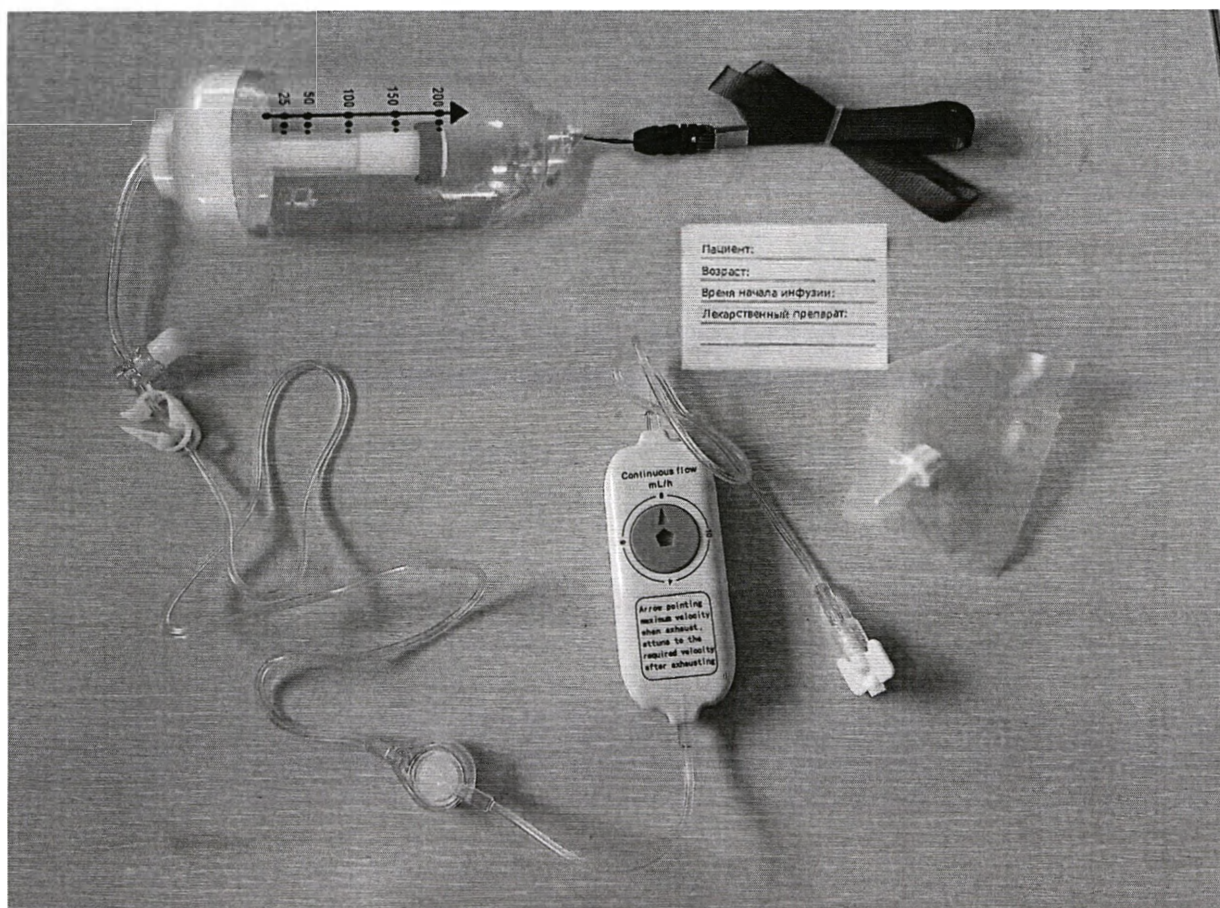


Рисунок. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 4/6/8/10 мл/ч, модель TQ20004 (объем 200 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной четырехскоростной MERIDIAN со скоростью вливания 4/6/8/10 мл/ч, модель TQ20004 (объем 200 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 64 мм ± 10% x 125 мм ± 10% 52,2 г ± 10 г
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 64 мм ± 10 % x 42 мм ± 10 % 19,5 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	200 см ³ ± 25 см ³ Ø16 мм ± 10% x 114 мм ± 10% 22,3 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 00010, 01011, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно)	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 1028 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	4-6-8-10 мл/ч (100 x 38 x 15) мм ± 5% 21 г ± 5%
Люер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 мм ± 5% 8 мм ± 5% 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

20. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 6/8/10/12 мл/ч, модель TQ20006 (объем 200 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Люер-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.



Рисунок. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 6/8/10/12 мл/ч, модель TQ20006 (объем 200 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной четырехскоростной MERIDIAN со скоростью вливания 6/8/10/12 мл/ч, модель TQ20006 (объем 200 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 64 мм ± 10% x 125 мм ± 10% 52,2 г ± 10 г
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 64 мм ± 10 % x 42 мм ± 10 % 19,5 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	200 см ³ ± 25 см ³ Ø16 мм ± 10% x 114 мм ± 10% 22,3 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 00010, 01011, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно)	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 1028 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	6-8-10-12 мл/ч (100 x 38 x 15) мм ± 5% 21 г ± 5%
Luер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 мм ± 5% 8 мм ± 5% 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

21. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч, модель TQ30002 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Лиер-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.



Рисунок. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч, модель TQ30002 (объем 300 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной четырехскоростной MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч, модель TQ30002 (объем 300 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 64 мм ± 10% x 153 мм ± 10% 62,4 г ± 10 г
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 64 мм ± 10 % x 42 мм ± 10 % 19,5 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	300 см ³ ± 25 см ³ Ø16 мм ± 10% x 114 мм ± 10% 22,3 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 00010, 01011, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно)	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 1028 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	2-4-6-8 мл/ч (100 x 38 x 15) мм ± 5% 21 г ± 5%
Люег-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 мм ± 5% 8 мм ± 5% 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

22. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 4/6/8/10 мл/ч, модель TQ30004 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Лиер-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.



Рисунок. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 4/6/8/10 мл/ч, модель TQ30004 (объем 300 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной четырехскоростной MERIDIAN со скоростью вливания 4/6/8/10 мл/ч, модель TQ30004 (объем 300 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 64 мм ± 10% x 153 мм ± 10% 62,4 г ± 10 г
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 64 мм ± 10 % x 42 мм ± 10 % 19,5 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	300 см ³ ± 25 см ³ Ø16 мм ± 10% x 114 мм ± 10% 22,3 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 00010, 01011, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно)	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 1028 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	4-6-8-10 мл/ч (100 x 38 x 15) мм ± 5% 21 г ± 5%
Люер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 мм ± 5% 8 мм ± 5% 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

23. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 6/8/10/12 мл/ч, модель TQ30006 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Луер-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.



Рисунок. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 6/8/10/12 мл/ч, модель TQ30006 (объем 300 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной четырехскоростной MERIDIAN со скоростью вливания 6/8/10/12 мл/ч, модель TQ30006 (объем 300 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 64 мм ± 10% x 153 мм ± 10% 62,4 г ± 10 г
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 64 мм ± 10 % x 42 мм ± 10 % 19,5 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	300 см ³ ± 25 см ³ Ø16 мм ± 10% x 114 мм ± 10% 22,3 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 00010, 01011, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно)	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 1028 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	6-8-10-12 мл/ч (100 x 38 x 15) мм ± 5% 21 г ± 5%
Luер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 мм ± 5% 8 мм ± 5% 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

24. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч с болюсом, модель TB10002 (объем 100 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 01010) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 10111) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 10010) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 10001) – 1 шт.
10. Соединительная трубка (код 10000) – 1 шт.
11. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
12. Соединительная трубка (код 01001) – 1 шт.
13. Крепежный зажим – 1 шт.
14. Фильтр – 1 шт.
15. Болюсное устройство (РСА) (1мл/15 мин, 1мл/30 мин, 2мл/15 мин, 2мл/30 мин) – 1 шт.
16. Регулятор скорости потока – 1 шт.
17. Трехсторонний соединитель трубок – 1 шт.
18. Луег-коннектор – 1 шт.
19. Защитный колпачок – 1 шт.
20. Сливной колпачок - 1 шт.
21. Эксплуатационная документация – 1 шт.
22. Карточка пациента – 1 шт.



Рисунок. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч с болюсом, модель TB10002 (объем 100 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной четырехскоростной MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч с болюсом, модель TB10002 (объем 100 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм $\pm$ 10 % X 10 мм $\pm$ 5% 5 г $\pm$ 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	$\varnothing$ 51 мм $\pm$ 10% x 122 мм $\pm$ 10% 33,1 г $\pm$ 10 %
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	$\varnothing$ 51 мм $\pm$ 10 % x 35 мм $\pm$ 10 % 9,4 г $\pm$ 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	100 см ³ $\pm$ 10 см ³ $\varnothing$ 13 мм $\pm$ 10 % x 98 мм $\pm$ 10% 12,6 г $\pm$ 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г $\pm$ 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 01010) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 10111, 10010, 10001, 10000, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно) - Соединительная трубка (код 01001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина	$\varnothing$ 4,0 мм $\pm$ 10% $\varnothing$ 2,0 мм $\pm$ 10% 80 мм $\pm$ 10% $\varnothing$ 3,0 мм $\pm$ 10% $\varnothing$ 0,6 мм $\pm$ 10% 887 мм $\pm$ 10% $\varnothing$ 3,0 мм $\pm$ 10% $\varnothing$ 0,09 мм $\pm$ 10% 97 мм $\pm$ 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилении надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н $\pm$ 8 Н (10 x 20 x 28) мм $\pm$ 10 % 1 г $\pm$ 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм $\pm$ 10 % 3 г $\pm$ 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	2-4-6-8 мл/ч (100 x 38 x 15) мм $\pm$ 5% 21 г $\pm$ 5%
Болюсное устройство (РСА) Режимы работы Усилие нажатия на кнопку введения Габаритные размеры Масса	1мл/15 мин, 1мл/30 мин, 2мл/15 мин, 2мл/30 мин 6 Н $\pm$ 2 Н (46 x 60 x 18) мм $\pm$ 5% 18 г $\pm$ 5%
Трехсторонний соединитель трубок Масса	0,75 г $\pm$ 5%

Наименование	Значение
Люер-коннектор	
Диаметр малого основания наружного конуса	6 мм ± 5 %
Диаметр большого основания внутреннего конуса	10 мм ± 5 %
Длина наружного конуса	26,5 мм ± 5 %
Длина внутреннего конуса	7,5 мм ± 5 %
Внешний диаметр замка	10 мм ± 5%
Внутренний диаметр замка	8 мм ± 5%
Конусность	6%
Защитный колпачок	
Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок	
Масса	0,738 г ± 10%
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

25. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч с болюсом, модель TB30002 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 01010) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 10111) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 10010) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 10001) – 1 шт.
10. Соединительная трубка (код 10000) – 1 шт.
11. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
12. Соединительная трубка (код 01001) – 1 шт.
13. Крепежный зажим – 1 шт.
14. Фильтр – 1 шт.
15. Болюсное устройство (РСА) (1мл/15 мин, 1мл/30 мин, 2мл/15 мин, 2мл/30 мин) – 1 шт.
16. Регулятор скорости потока – 1 шт.
17. Трехсторонний соединитель трубок – 1 шт.
18. Luer-коннектор – 1 шт.
19. Защитный колпачок – 1 шт.
20. Сливной колпачок - 1 шт.
21. Эксплуатационная документация – 1 шт.
22. Карточка пациента – 1 шт.

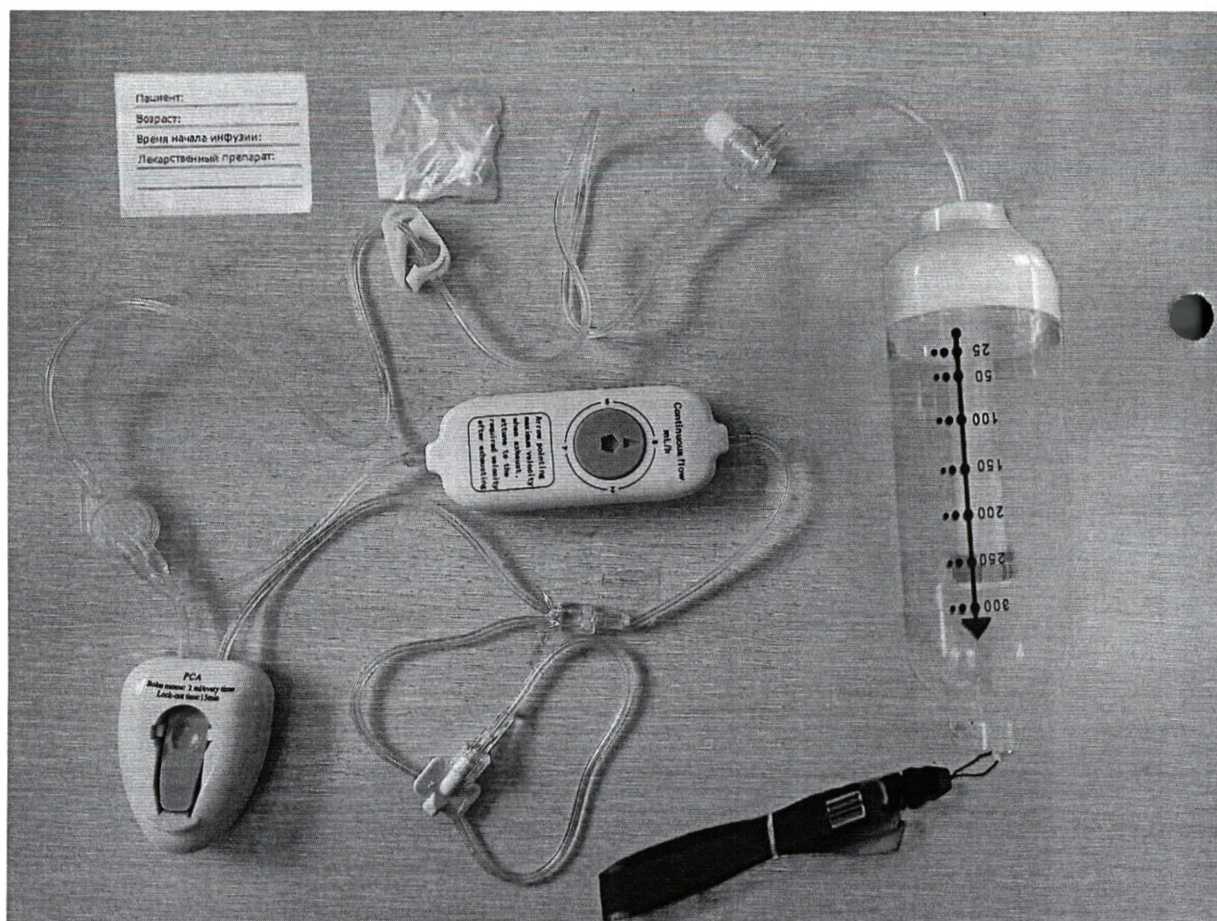


Рисунок. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч с болюсом, модель TB30002 (объем 300 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной четырехскоростной MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч с болюсом, модель ТВ30002 (объем 300 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм $\pm$ 10 % X 10 мм $\pm$ 5% 5 г $\pm$ 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 64 мм $\pm$ 10% x 153 мм $\pm$ 10% 62,4 г $\pm$ 10 %
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 64 мм $\pm$ 10 % x 42 мм $\pm$ 10 % 19,5 г $\pm$ 10%
Эластичный баллон Объём Габаритные размеры Масса	300 см ³ $\pm$ 25 см ³ Ø16 мм $\pm$ 10 % x 114 мм $\pm$ 10% 22,3 г $\pm$ 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г $\pm$ 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 01010) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 10111, 10010, 10001, 10000, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно) - Соединительная трубка (код 01001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина	Ø4,0 мм $\pm$ 10% Ø2,0 мм $\pm$ 10% 80 мм $\pm$ 10% Ø3,0 мм $\pm$ 10% Ø0,6 мм $\pm$ 10% 887 мм $\pm$ 10% Ø3,0 мм $\pm$ 10% Ø0,09 мм $\pm$ 10% 97 мм $\pm$ 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н $\pm$ 8 Н (10 x 20 x 28) мм $\pm$ 10 % 1 г $\pm$ 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм $\pm$ 10 % 3 г $\pm$ 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	2-4-6-8 мл/ч (100 x 38 x 15) мм $\pm$ 5% 21 г $\pm$ 5%
Болюсное устройство (РСА) Режимы работы Усилие нажатия на кнопку введения Габаритные размеры Масса	1мл/15 мин, 1мл/30 мин, 2мл/15 мин, 2мл/30 мин 6 Н $\pm$ 2 Н (46 x 60 x 18) мм $\pm$ 5% 18 г $\pm$ 5%
Трехсторонний соединитель трубок Масса	0,75 г $\pm$ 5%

Наименование	Значение
Luер-коннектор	
Диаметр малого основания наружного конуса	6 мм ± 5 %
Диаметр большого основания внутреннего конуса	10 мм ± 5 %
Длина наружного конуса	26,5 мм ± 5 %
Длина внутреннего конуса	7,5 мм ± 5 %
Внешний диаметр замка	10 мм ± 5%
Внутренний диаметр замка	8 мм ± 5%
Конусность	6%
Защитный колпачок	
Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок	
Масса	0,738 г ± 10%
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

26. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 4/6/8/10 мл/ч с болюсом, модель ТВ30004 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 01010) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 10111) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 10010) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 10001) – 1 шт.
10. Соединительная трубка (код 10000) – 1 шт.
11. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
12. Соединительная трубка (код 01001) – 1 шт.
13. Крепежный зажим – 1 шт.
14. Фильтр – 1 шт.
15. Болюсное устройство (РСА) (1мл/15 мин, 1мл/30 мин, 2мл/15 мин, 2мл/30 мин) – 1 шт.
16. Регулятор скорости потока – 1 шт.
17. Трехсторонний соединитель трубок – 1 шт.
18. Луег-коннектор – 1 шт.
19. Защитный колпачок – 1 шт.
20. Сливной колпачок – 1 шт.
21. Эксплуатационная документация – 1 шт.
22. Карточка пациента – 1 шт.

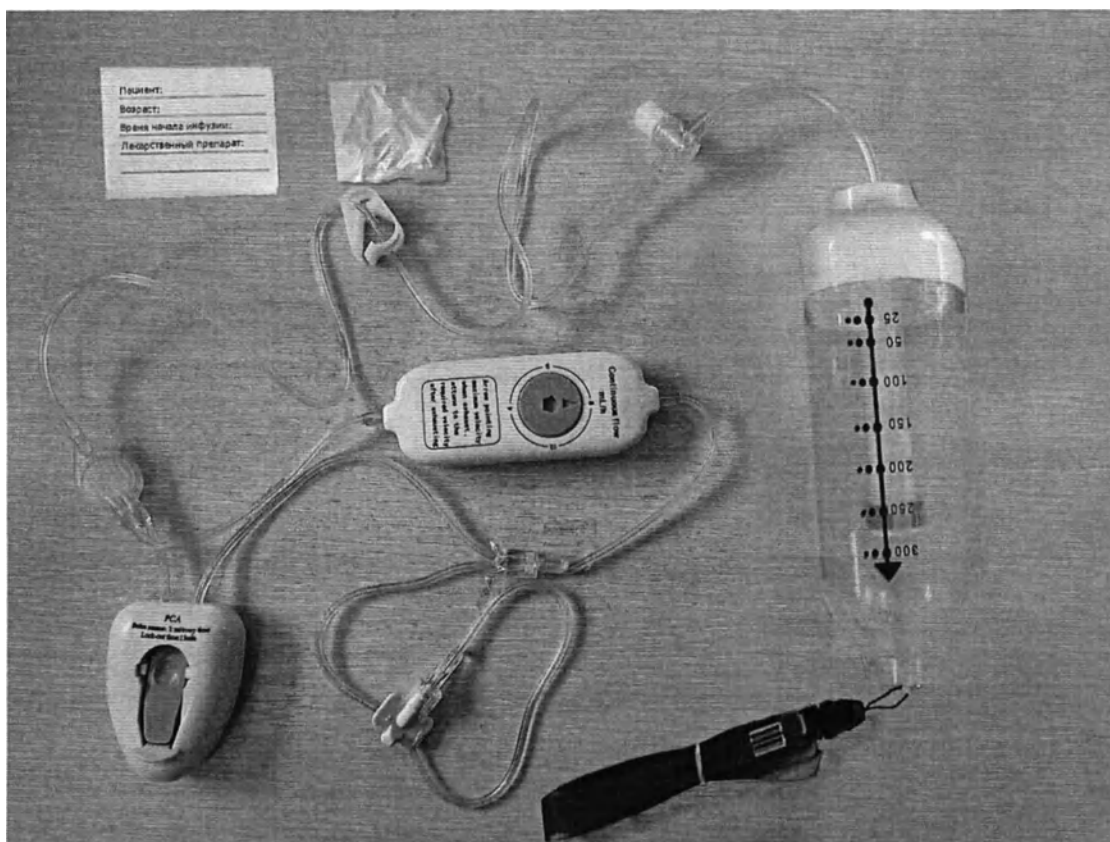


Рисунок. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 4/6/8/10 мл/ч с болюсом, модель ТВ30004 (объем 300 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной четырехскоростной MERIDIAN со скоростью вливания 4/6/8/10 мл/ч с болюсом, модель ТВ30004 (объем 300 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 64 мм ± 10% x 153 мм ± 10% 62,4 г ± 10 %
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 64 мм ± 10 % x 42 мм ± 10 % 19,5 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	300 см ³ ± 25 см ³ Ø16 мм ± 10 % x 114 мм ± 10% 22,3 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 01010) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 10111, 10010, 10001, 10000, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно) - Соединительная трубка (код 01001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 80 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 887 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,09 мм ± 10% 97 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	4-6-8-10 мл/ч (100 x 38 x 15) мм ± 5% 21 г ± 5%
Болюсное устройство (РСА) Режимы работы Усилие нажатия на кнопку введения Габаритные размеры Масса	1мл/15 мин, 1мл/30 мин, 2мл/15 мин, 2мл/30 мин 6 Н ± 2 Н (46 x 60 x 18) мм ± 5% 18 г ± 5%
Трехсторонний соединитель трубок Масса	0,75 г ± 5%

Наименование	Значение
Luер-коннектор	
Диаметр малого основания наружного конуса	6 мм ± 5 %
Диаметр большого основания внутреннего конуса	10 мм ± 5 %
Длина наружного конуса	26,5 мм ± 5 %
Длина внутреннего конуса	7,5 мм ± 5 %
Внешний диаметр замка	10 мм ± 5%
Внутренний диаметр замка	8 мм ± 5%
Конусность	6%
Защитный колпачок	
Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок	
Масса	0,738 г ± 10%
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

27. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 6/8/10/12 мл/ч с болюсом, модель ТВ30006 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 01010) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 10111) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 10010) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 10001) – 1 шт.
10. Соединительная трубка (код 10000) – 1 шт.
11. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
12. Соединительная трубка (код 01001) – 1 шт.
13. Крепежный зажим – 1 шт.
14. Фильтр – 1 шт.
15. Болюсное устройство (PCA) (1мл/15 мин, 1мл/30 мин, 2мл/15 мин, 2мл/30 мин) – 1 шт.
16. Регулятор скорости потока – 1 шт.
17. Трехсторонний соединитель трубок – 1 шт.
18. Лuer-коннектор – 1 шт.
19. Защитный колпачок – 1 шт.
20. Сливной колпачок – 1 шт.
21. Эксплуатационная документация – 1 шт.
22. Карточка пациента – 1 шт.

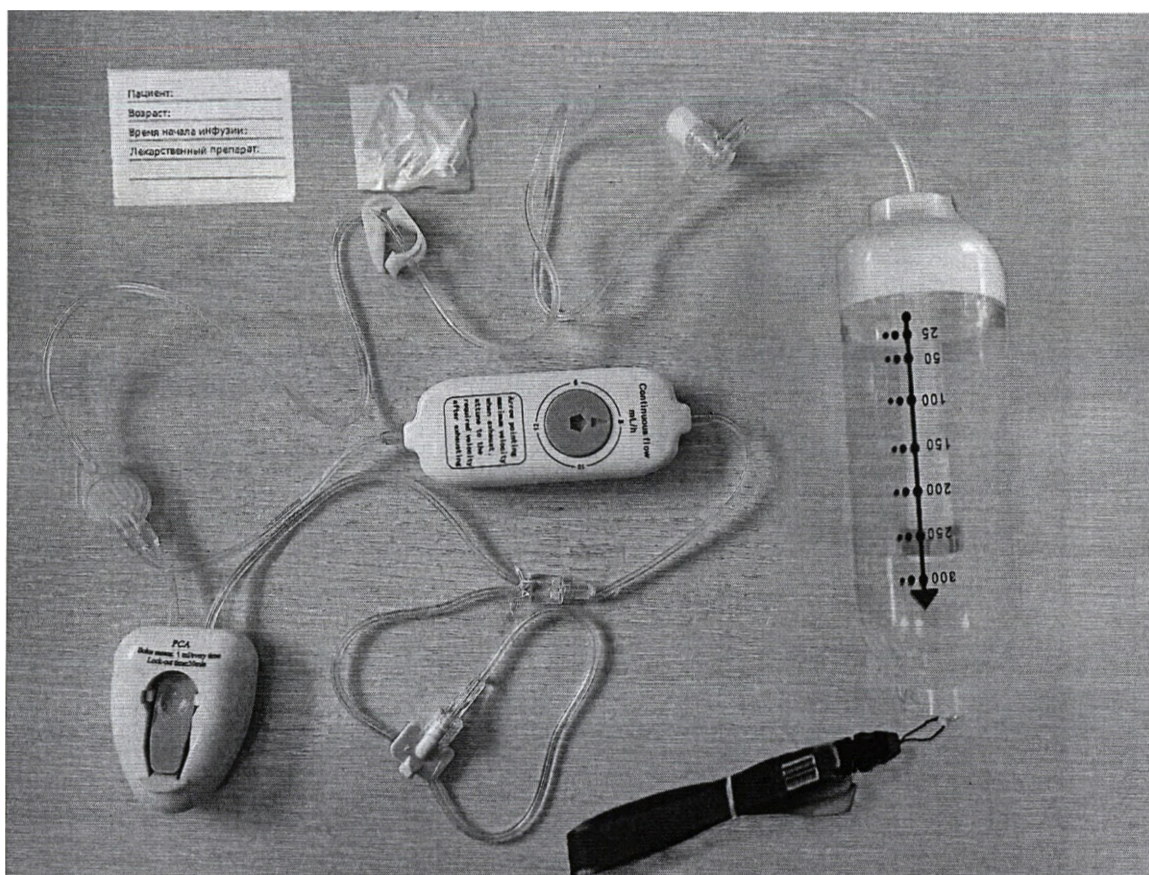


Рисунок. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 6/8/10/12 мл/ч с болюсом, модель ТВ30006 (объем 300 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной четырехскоростной MERIDIAN со скоростью вливания 6/8/10/12 мл/ч с болюсом, модель ТВ30006 (объем 300 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм $\pm$ 10 % X 10 мм $\pm$ 5% 5 г $\pm$ 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	$\varnothing$ 64 мм $\pm$ 10% x 153 мм $\pm$ 10% 62,4 г $\pm$ 10 %
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	$\varnothing$ 64 мм $\pm$ 10 % x 42 мм $\pm$ 10 % 19,5 г $\pm$ 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	300 см ³ $\pm$ 25 см ³ $\varnothing$ 16 мм $\pm$ 10 % x 114 мм $\pm$ 10% 22,3 г $\pm$ 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г $\pm$ 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 01010) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 10111, 10010, 10001, 10000, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно) - Соединительная трубка (код 01001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина	$\varnothing$ 4,0 мм $\pm$ 10% $\varnothing$ 2,0 мм $\pm$ 10% 80 мм $\pm$ 10% $\varnothing$ 3,0 мм $\pm$ 10% $\varnothing$ 0,6 мм $\pm$ 10% 887 мм $\pm$ 10% $\varnothing$ 3,0 мм $\pm$ 10% $\varnothing$ 0,09 мм $\pm$ 10% 97 мм $\pm$ 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н $\pm$ 8 Н (10 x 20 x 28) мм $\pm$ 10 % 1 г $\pm$ 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм $\pm$ 10 % 3 г $\pm$ 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	6-8-10-12 мл/ч (100 x 38 x 15) мм $\pm$ 5% 21 г $\pm$ 5%
Болюсное устройство (РСА) Режимы работы Усилие нажатия на кнопку введения Габаритные размеры Масса	1мл/15 мин, 1мл/30 мин, 2мл/15 мин, 2мл/30 мин 6 Н $\pm$ 2 Н (46 x 60 x 18) мм $\pm$ 5% 18 г $\pm$ 5%
Трехсторонний соединитель трубок Масса	0,75 г $\pm$ 5%

Наименование	Значение
Лигер-коннектор	
Диаметр малого основания наружного конуса	6 мм ± 5 %
Диаметр большого основания внутреннего конуса	10 мм ± 5 %
Длина наружного конуса	26,5 мм ± 5 %
Длина внутреннего конуса	7,5 мм ± 5 %
Внешний диаметр замка	10 мм ± 5%
Внутренний диаметр замка	8 мм ± 5%
Конусность	6%
Защитный колпачок	
Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок	
Масса	0,738 г ± 10%
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

28. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/5/7/10 мл/ч, модель WF100 (объем 100 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Луер-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

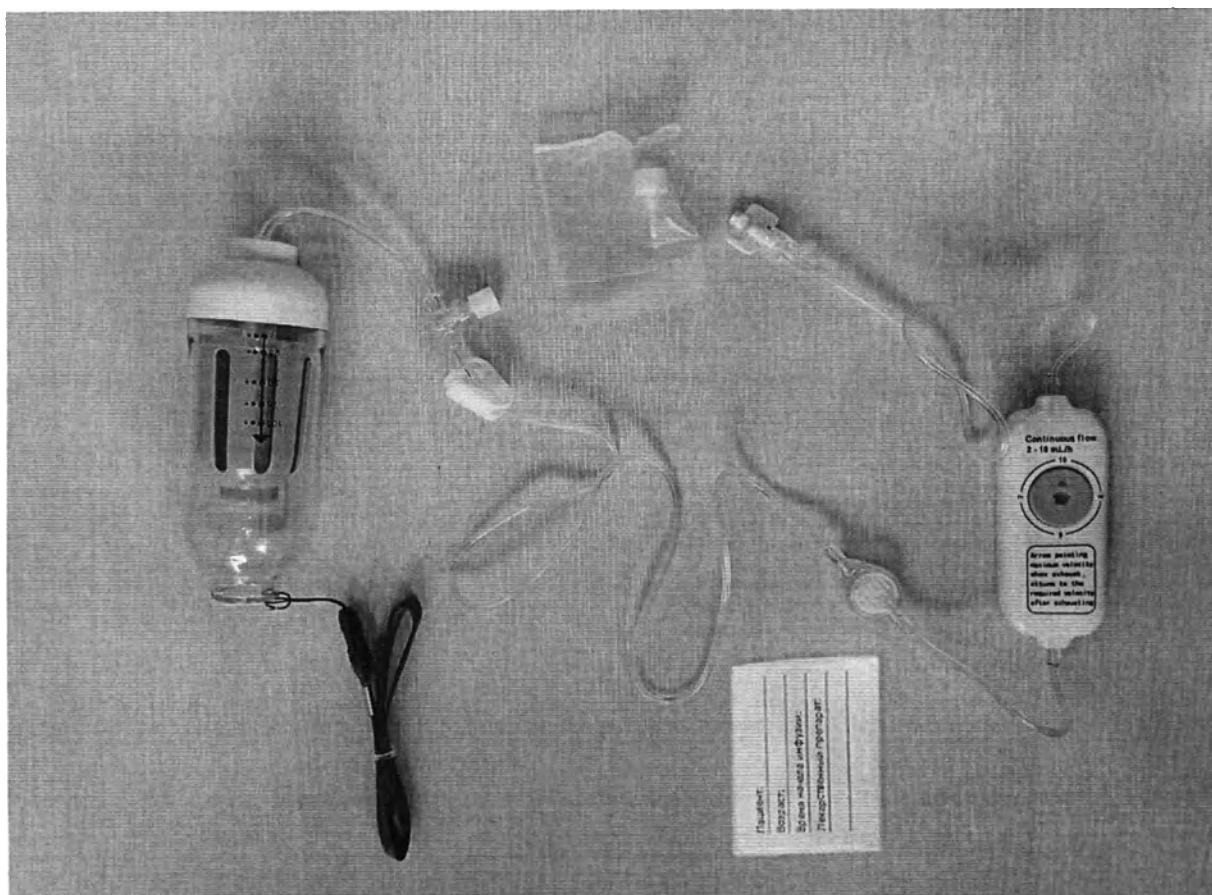


Рисунок. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/5/7/10 мл/ч, модель WF100 (объем 100 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной четырехскоростной MERIDIAN со скоростью вливания 2/5/7/10 мл/ч, модель WF100 (объем 100 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 51 мм ± 10% x 122 мм ± 10% 33,1 г ± 10 %
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 51 мм ± 10 % x 35 мм ± 10 % 9,4 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	100 см ³ ± 10 см ³ Ø13 мм ± 10% x 98 мм ± 10% 12,6 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 00010, 01011, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно)	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 1028 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	2-5-7-10 мл/ч (100 x 38 x 15) мм ± 5% 21 г ± 5%
Лигер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 мм ± 5% 8 мм ± 5% 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

29. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/5/7/10 мл/ч, модель WF200 (объем 200 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Луер-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

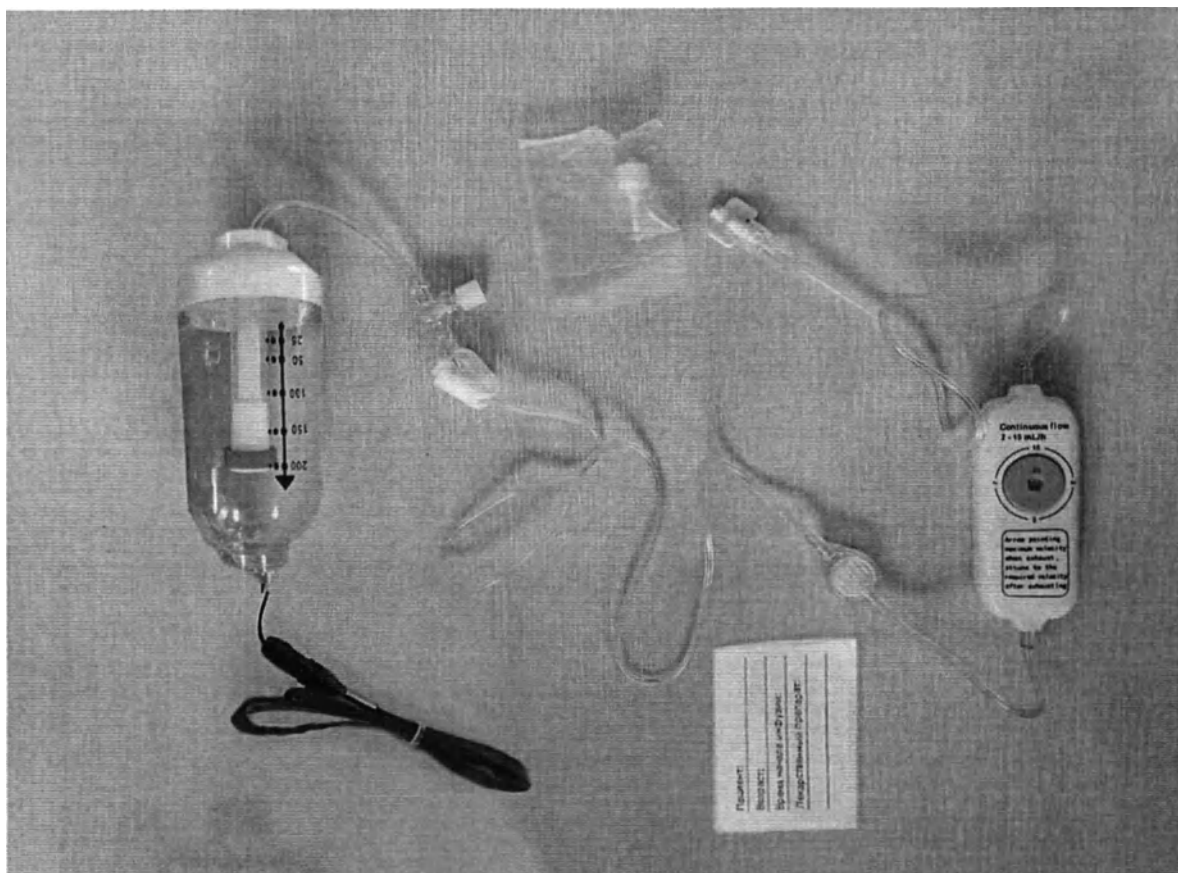


Рисунок. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/5/7/10 мл/ч, модель WF200 (объем 200 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной четырехскоростной MERIDIAN со скоростью вливания 2/5/7/10 мл/ч, модель WF200 (объем 200 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 64 мм ± 10% x 125 мм ± 10% 52,2 г ± 10 г
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 64 мм ± 10 % x 42 мм ± 10 % 19,5 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	200 см ³ ± 25 см ³ Ø16 мм ± 10% x 114 мм ± 10% 22,3 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 00010, 01011, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно)	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 1028 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилении надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	2-5-7-10 мл/ч (100 x 38 x 15) мм ± 5% 21 г ± 5%
Люер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 мм ± 5% 8 мм ± 5% 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

30. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/5/7/10 мл/ч, модель WF300 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Лиер-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

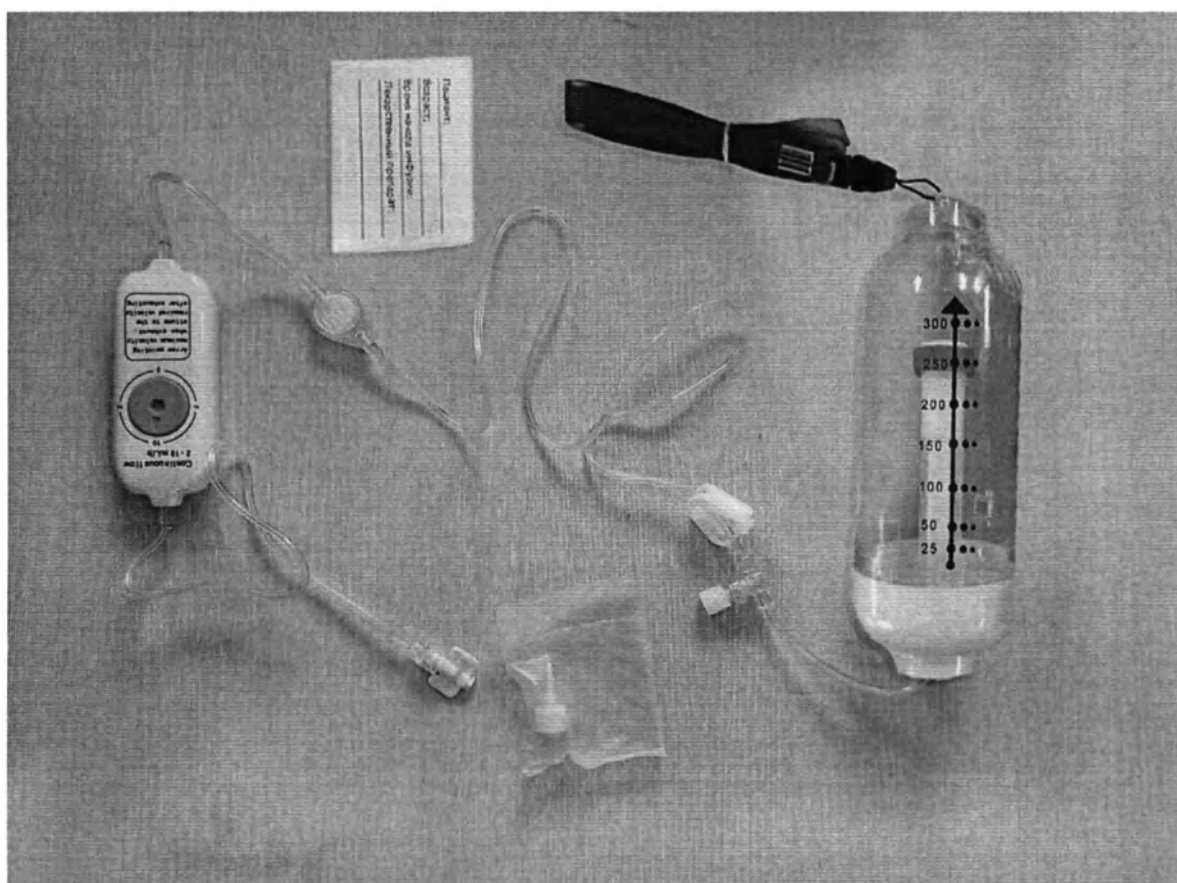


Рисунок. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/5/7/10 мл/ч, модель WF300 (объем 300 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной четырехскоростной MERIDIAN со скоростью вливания 2/5/7/10 мл/ч, модель WF300 (объем 300 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 64 мм ± 10% x 153 мм ± 10% 62,4 г ± 10 %
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 64 мм ± 10 % x 42 мм ± 10 % 19,5 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	300 см ³ ± 25 см ³ Ø16 мм ± 10% x 114 мм ± 10% 22,3 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 00010, 01011, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно)	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 1028 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилении надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	2-5-7-10 мл/ч (100 x 38 x 15) мм ± 5% 21 г ± 5%
Люер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 мм ± 5% 8 мм ± 5% 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

31. Помпа инфузионная многоскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 мл/ч, модель UV10001 (объем 100 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Luer-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.



Рисунок. Помпа инфузионная многоскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 мл/ч, модель UV10001 (объем 100 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной многоскоростной MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 мл/ч, модель UV10001 (объем 100 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 51 мм ± 10% x 122 мм ± 10% 33,1 г ± 10 %
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 51 мм ± 10 % x 35 мм ± 10 % 9,4 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	100 см ³ ± 10 см ³ Ø13 мм ± 10% x 98 мм ± 10% 12,6 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 00010, 01011, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно)	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 1028 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилении надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	1-2-3-4...15 мл/ч (100 x 38 x 15) мм ± 5% 21 г ± 5%
Люер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 мм ± 5% 8 мм ± 5% 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

32. Помпа инфузионная многоскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 мл/ч, модель UV20001 (объем 200 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Луер-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.



Рисунок. Помпа инфузионная многоскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 мл/ч, модель UV20001 (объем 200 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпа инфузионная многоскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 мл/ч, модель UV20001 (объем 200 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 64 мм ± 10% x 125 мм ± 10% 52,2 г ± 10 %
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 64 мм ± 10 % x 42 мм ± 10 % 19,5 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	200 см ³ ± 25 см ³ Ø16 мм ± 10% x 114 мм ± 10% 22,3 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 00010, 01011, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно)	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 1028 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилении надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	1-2-3-4...15 мл/ч (100 x 38 x 15) мм ± 5% 21 г ± 5%
Люер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 мм ± 5% 8 мм ± 5% 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

33. Помпа инфузионная многоскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 мл/ч, модель UV30001 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Люер-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.



Рисунок. Помпа инфузионная многоскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 мл/ч, модель UV30001 (объем 300 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной многоскоростной MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 мл/ч, модель UV30001 (объем 300 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 64 мм ± 10% x 153 мм ± 10% 62,4 г ± 10 %
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 64 мм ± 10 % x 42 мм ± 10 % 19,5 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	300 см ³ ± 25 см ³ Ø16 мм ± 10% x 114 мм ± 10% 22,3 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (00010, 01011, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно)	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 1028 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	1-2-3-4...15 мл/ч (100 x 38 x 15) мм ± 5% 21 г ± 5%
Люер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 мм ± 5% 8 мм ± 5% 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

34. Помпа инфузионная многоскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8/10/12/14 мл/ч, модель MG10002 (объем 100 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Лuer-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.

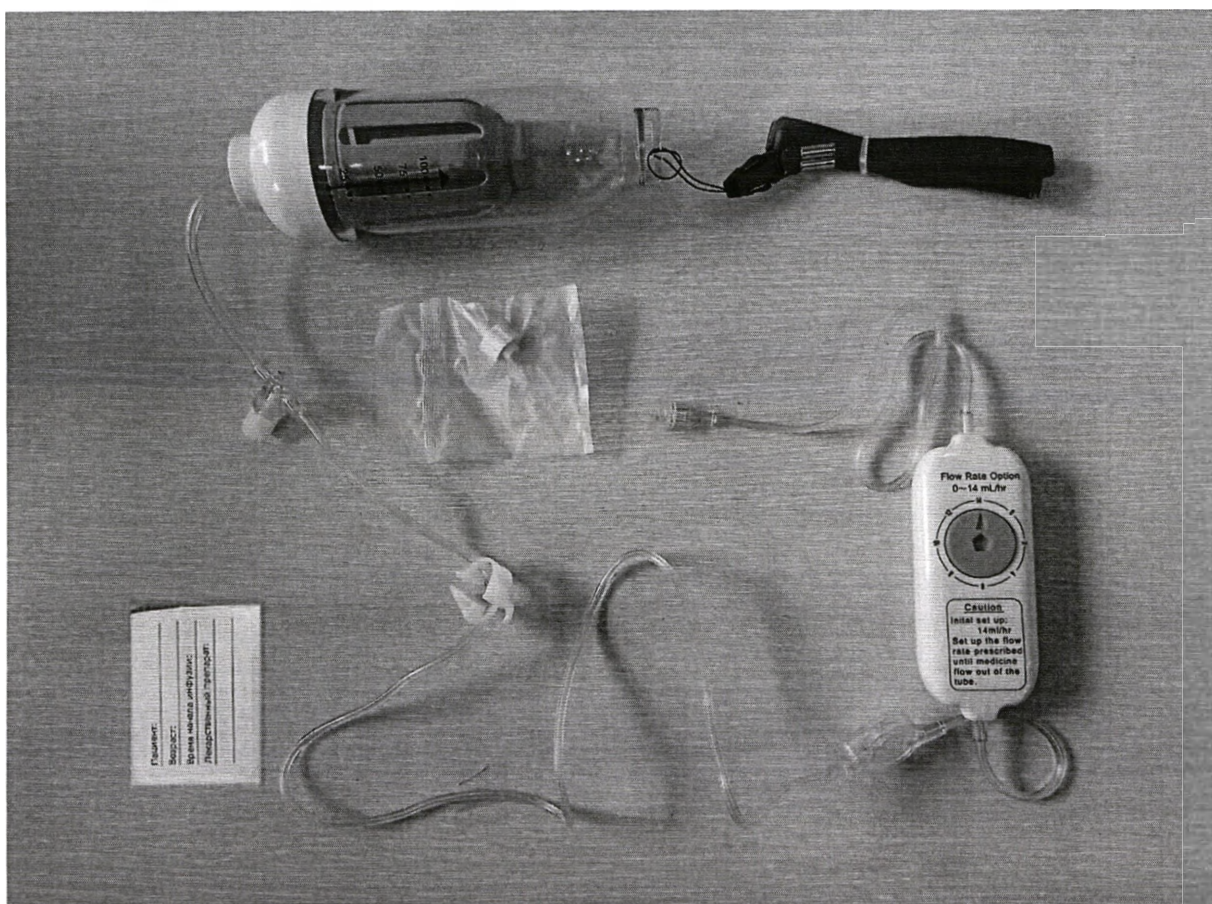


Рисунок. Помпа инфузионная многоскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8/10/12/14 мл/ч, модель MG10002 (объем 100 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной многоскоростной MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8/10/12/14 мл/ч, модель MG10002 (объем 100 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 51 мм ± 10% x 122 мм ± 10% 33,1 г ± 10 %
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 51 мм ± 10 % x 35 мм ± 10 % 9,4 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	100 см ³ ± 10 см ³ Ø13 мм ± 10% x 98 мм ± 10% 12,6 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 00010, 01011, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно)	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 1028 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилении надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	2-4-6-8... 16 мл/ч (100 x 38 x 15) мм ± 5% 21 г ± 5%
Люер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 мм ± 5% 8 мм ± 5% 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

35. Помпа инфузионная многоскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8/10/12/14 мл/ч, модель MG20002 (объем 200 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Луер-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.



Рисунок. Помпа инфузионная многоскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8/10/12/14 мл/ч, модель MG20002 (объем 200 мл)

Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной многоскоростной MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8/10/12/14 мл/ч, модель MG20002 (объем 200 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 64 мм ± 10% x 125 мм ± 10% 52,2 г ± 10 %
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 64 мм ± 10 % x 42 мм ± 10 % 19,5 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	200 см ³ ± 25 см ³ Ø16 мм ± 10% x 114 мм ± 10% 22,3 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 00010, 01011, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно)	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 1028 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилии надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	2-4-6-8...16 мл/ч (100 x 38 x 15) мм ± 5% 21 г ± 5%
Люер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 мм ± 5% 8 мм ± 5% 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %

36. Помпа инфузионная многоскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8/10/12/14 мл/ч, модель MG30002 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительная трубка (код 00001) – 1 шт.
7. Соединительная трубка (код 00010) – 1 шт.
8. Соединительная трубка (код 01011) – 1 шт.
9. Соединительная трубка (код 01111) – 1 шт.
10. Крепежный зажим – 1 шт.
11. Фильтр – 1 шт.
12. Регулятор скорости потока – 1 шт.
13. Луер-коннектор – 1 шт.
14. Защитный колпачок – 1 шт.
15. Сливной колпачок – 1 шт.
16. Эксплуатационная документация – 1 шт.
17. Карточка пациента – 1 шт.



Рисунок. Помпа инфузионная многоскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8/10/12/14 мл/ч, модель MG30002 (объем 300 мл)


Таблица. Технические характеристики Помпы инфузионной многоскоростной MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8/10/12/14 мл/ч, модель MG30002 (объем 300 мл)

Наименование	Значение
Тканевая лента (в сборе с крепежным элементом) Габаритные размеры Масса	840 мм ± 10 % X 10 мм ± 5% 5 г ± 10 %
Защитный корпус Габаритные размеры (с учетом крышки) Масса	Ø 64 мм ± 10% x 153 мм ± 10% 62,4 г ± 10 %
Крышка корпуса Габаритные размеры Масса	Ø 64 мм ± 10 % x 42 мм ± 10 % 19,5 г ± 10%
Эластичный баллон Объем Габаритные размеры Масса	300 см ³ ± 25 см ³ Ø16 мм ± 10% x 114 мм ± 10% 22,3 г ± 10 %
Односторонний клапан (заправочный порт) Масса	2 г ± 10 %
Соединительные трубки - Соединительная трубка (код 00001) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина - Соединительные трубки (коды 00010, 01011, 01111) Внешний диаметр Внутренний диаметр Длина (суммарно)	Ø4,0 мм ± 10% Ø2,0 мм ± 10% 88 мм ± 10% Ø3,0 мм ± 10% Ø0,6 мм ± 10% 1028 мм ± 10%
Крепежный зажим полностью останавливает подачу жидкости при усилении надавливания Габаритные размеры Масса	25 Н ± 8 Н (10 x 20 x 28) мм ± 10 % 1 г ± 10 %
Фильтр Размер пор Габаритные размеры Масса	не более 1,2 мкм (50 x 22 x 8) мм ± 10 % 3 г ± 10 %
Регулятор скорости потока Габаритные размеры Масса	2-4-6-8...16 мл/ч (100 x 38 x 15) мм ± 5% 21 г ± 5%
Люер-коннектор Диаметр малого основания наружного конуса Диаметр большого основания внутреннего конуса Длина наружного конуса Длина внутреннего конуса Внешний диаметр замка Внутренний диаметр замка Конусность	6 мм ± 5 % 10 мм ± 5 % 26,5 мм ± 5 % 7,5 мм ± 5 % 10 мм ± 5% 8 мм ± 5% 6%
Защитный колпачок Масса	0,675 г ± 10%
Сливной колпачок Масса	0,738 г ± 10%

Наименование	Значение
Индивидуальная упаковка	
Габаритные размеры	320 мм ± 10 % x 190 мм ± 10 %
Масса	9 г ± 10 %


Чертежи (схемы) медицинского изделия

1. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания (модели CP10002, CP10004, CP10005, CP20002, CP20004, CP20005, CP30002, CP30004, CP30005)

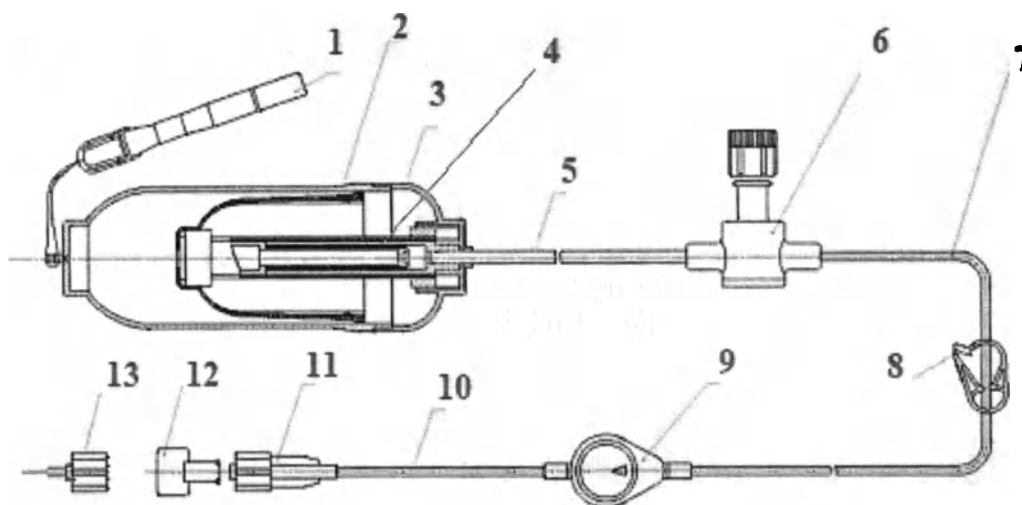


1. Тканевая лента
2. Защитный корпус
3. Крышка корпуса
4. Эластичный баллон
5. Соединительная трубка (код 00001)
6. Односторонний клапан (заправочный порт)
7. Соединительная трубка (код 00010)
8. Крепежный зажим
9. Фильтр
10. Соединительная трубка
(код 00111) – для моделей CP10005, CP20005, CP30005;
(код 00110) – для моделей CP10004, CP20004, CP30004;
(код 00101) – для моделей CP10002, CP20002, CP30002
11. Люер-коннектор
12. Защитный колпачок
13. Сливной колпачок

2. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания (с мягким корпусом) (модели SA10002, SA40005, SA40010)

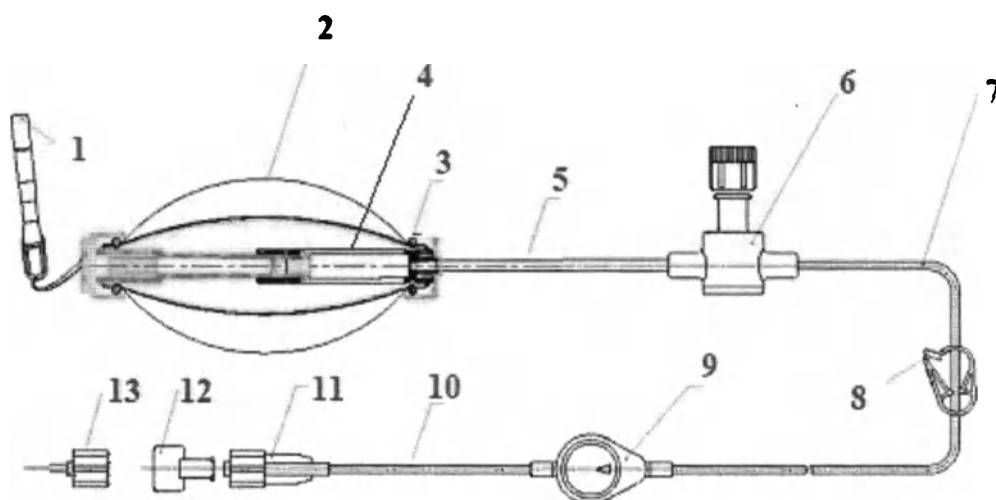


1. Тканевая лента
2. Защитный корпус
3. Крышка корпуса
4. Эластичный баллон
5. Соединительная трубка (код 00001)
6. Односторонний клапан (заправочный порт)
7. Соединительная трубка (код 00010)
8. Крепежный зажим
9. Фильтр
10. Соединительная трубка
(код 01000) – для модели SA40010;
(код 00111) – для модели SA40005;
(код 00101) – для модели SA10002
11. Лuer-коннектор
12. Защитный колпачок
13. Сливной колпачок

3. Помпа инфузионная MERIDIAN с регулятором скорости потока
(модели: FO10001, FO20001, FO30001, TQ10002, TQ20002, TQ20004, TQ20006, TQ30002, TQ30004, TQ30006, WF100, WF200, WF300, UV10001, UV20001, UV30001, MG10002, MG20002, MG30002)

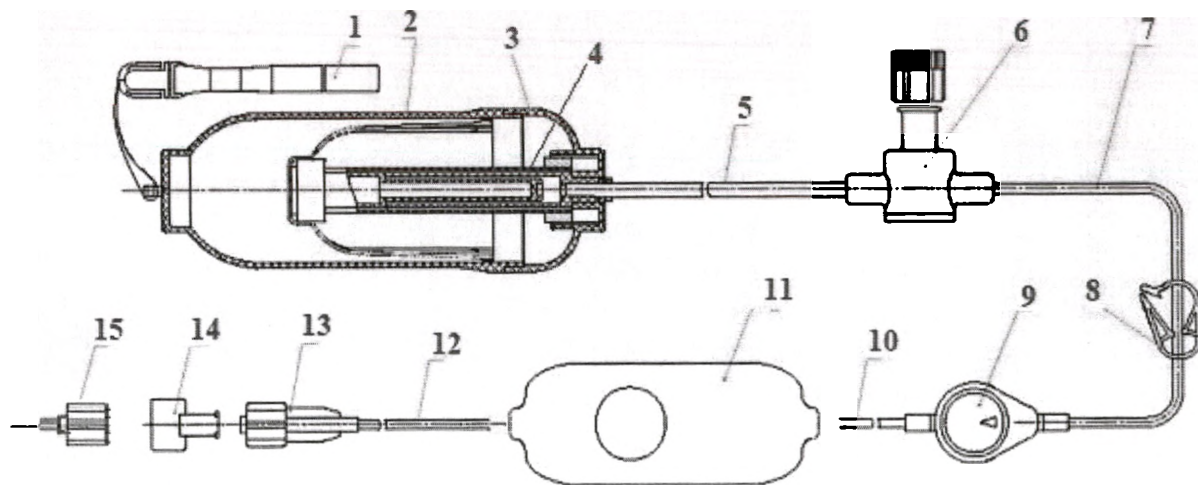

1. Тканевая лента
2. Защитный корпус
3. Крышка корпуса
4. Эластичный баллон
5. Соединительная трубка (код 00001)
6. Односторонний клапан (заправочный порт)
7. Соединительная трубка (код 00010)
8. Крепежный зажим
9. Фильтр
10. Соединительная трубка (код 01011)
11. Регулятор скорости потока
12. Соединительная трубка (код 01111)
13. Люер-коннектор
14. Защитный колпачок
15. Сливной колпачок

4. Помпа инфузионная MERIDIAN с регулятором скорости потока, с болюсом (модели: FB10001, TB10002, TB30002, TB30004, TB30006)

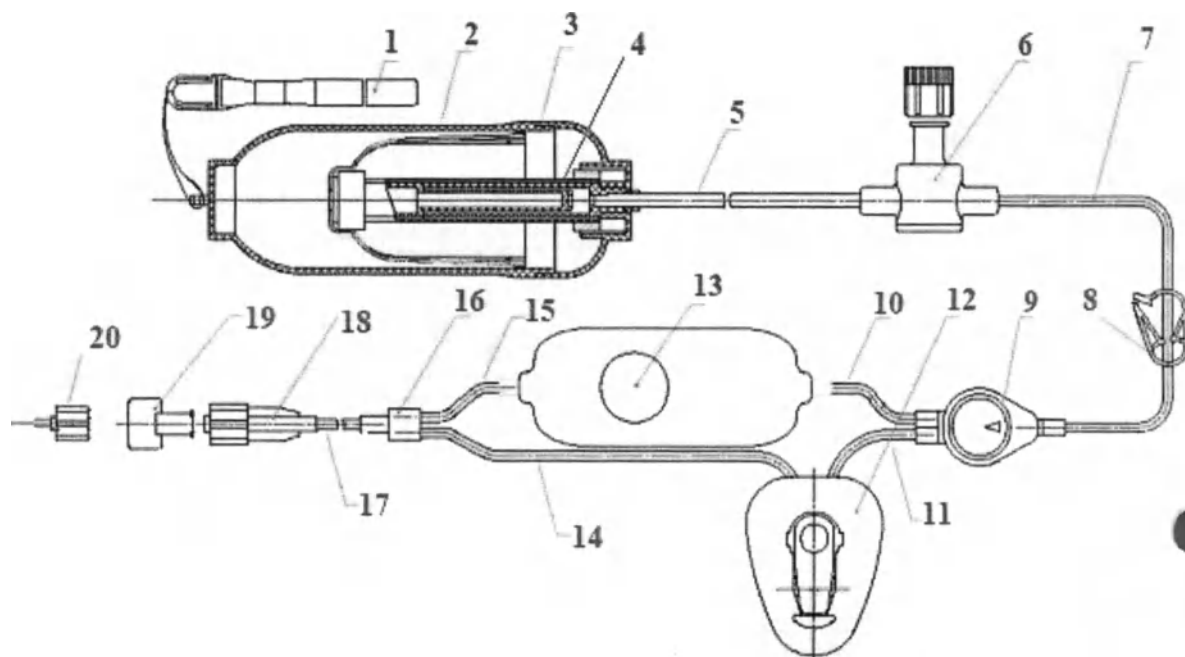

1. Тканевая лента
2. Защитный корпус
3. Крышка корпуса
4. Эластичный баллон
5. Соединительная трубка (код 01010)
6. Односторонний клапан (заправочный порт)
7. Соединительная трубка (код 10111)
8. Крепежный зажим
9. Фильтр
10. Соединительная трубка (код 10010)
11. Соединительная трубка (код 10001)
12. Болюсное устройство (РСА)
13. Регулятор скорости потока
14. Соединительная трубка (код 10000)
15. Соединительная трубка (код 01001)
16. Трехсторонний соединитель трубок
17. Соединительная трубка (код 01111)
18. Люег-коннектор
19. Защитный колпачок
20. Сливной колпачок

Материалы, из которых изготовлено медицинское изделие и упаковка

Часть помпы	Марка, материал	Производитель
Для моделей помп: CP10002, CP10004, CP10005, CP20002, CP20004, CP20005, CP30002, CP30004, CP30005, FO10001, FO20001, FO30001, TQ10002, TQ20002, TQ20004, TQ20006, TQ30002, TQ30004, TQ30006, WF100, WF200, WF300, UV10001, UV20001, UV30001, MG10002, MG20002, MG30002, FB10001, TB10002, TB30002, TB30004, TB30006		
Защитный корпус	Сополимер акрилонитрила и стирола (AS) SM4022	Zhejiang Fert Medical Device Co.,LTD, Китай / Jiaxing hongteng trading co. LTD, Китай
Крышка корпуса	Сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола (ABS) 0215A	Zhejiang Fert Medical Device Co.,LTD, Китай / Jiaxing hongteng trading co. LTD, Китай
Для моделей помп: SA10002, SA40005, SA40010		
Защитный корпус	ПВХ (не содержащий Бис(2-этилгексил) фталат (DEHP)) CM502	Zhejiang Fert Medical Device Co.,LTD, Китай / Jiaxing hongteng trading co. LTD, Китай
Крышка корпуса (2 шт.)	Сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола (ABS) 0215A	Zhejiang Fert Medical Device Co.,LTD, Китай / Jiaxing hongteng trading co. LTD, Китай
Для моделей помп: FO10001, FO20001, FO30001, TQ10002, TQ20002, TQ20004, TQ20006, TQ30002, TQ30004, TQ30006, WF100, WF200, WF300, UV10001, UV20001, UV30001, MG10002, MG20002, MG30002, FB10001, TB10002, TB30002, TB30004, TB30006		
Регулятор скорости потока	АБС-пластик 0215A	Zhejiang Fert Medical Device Co.,LTD, Китай
Для моделей помп: FB10001, TB10002, TB30002, TB30004, TB30006		
Болюсное устройство (PCA)	Силикон SR-04 + Сополимер метилметакрилата, бутадиена и стирола (MBS) 303641	Zhejiang Fert Medical Device Co.,LTD, Китай
Трехсторонний соединитель трубок	Сополимер бутадиена и стирола K-Resin KR01	Zhejiang Fert Medical Device Co.,LTD, Китай
Для всех моделей помп		
Эластичный баллон	Силикон SR-04	Zhejiang Fert Medical Device Co.,LTD, Китай
Односторонний клапан (заправочный порт)	Сополимер бутадиена и стирола K-Resin KR01	Zhejiang Fert Medical Device Co.,LTD, Китай
Крепежный зажим	АБС-пластик 0215A	Zhejiang Fert Medical Device Co.,LTD, Китай
Фильтр	АБС-пластик 0215A + Полиэтилентерефталат + полиэстр	Zhejiang Fert Medical Device Co.,LTD, Китай
Соединительные трубки	Термопластичный полиуретан 3311	Zhejiang Fert Medical Device Co.,LTD, Китай
Лuer-коннектор	Сополимер бутадиена и стирола K-Resin KR01	Zhejiang Fert Medical Device Co.,LTD, Китай
Защитный колпачок	Полипропилен S1300	Zhejiang Fert Medical Device Co.,LTD, Китай
Сливной колпачок	Полипропилен S1300	Zhejiang Fert Medical Device Co.,LTD, Китай

Тканевая лента	Нейлон nt637b	JIAN HUA (Personal), Китай
Карточка пациента	Бумага марка Chenming	Changzhou Shuanghe Medical Packing Technology Co., LTD
Индивидуальная упаковка		
Пленка	ПЭ 7042 / ПЭТ 25038-59-9	HAINING XINGYUAN, Китай / Changzhou Shuanghe Medical Packing Technology Co., LTD, Китай
Бумага	Бумага 9002-88-4	Dupont China Group Co. LTD. Shanghai Branch, Китай / Changzhou Shuanghe Medical Packing Technology Co., LTD, Китай
Чернила	Водорастворимые чернила Unicor	Sedgwick, Германия
Клей	295 glue water	Dow Chemical (Shanghai) Co., LTD, Китай
Транспортная упаковка		
Гофрокартон	AB tile ZMES9	ZhejiangXiasharongchengbaozhuang Limited Company, Китай

Перечень материалов животного и (или) человеческого происхождения

Не содержит материалы животного и (или) человеческого происхождения.

Данные государственного реестра лекарственных средств

Данное медицинское изделие не содержит лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций.

Меры предосторожности

- Заправка помпы должна производиться медицинским персоналом.
- Использовать асептическую технику работы при установке помпы пациенту, медперсонал работает в перчатках.
- Не использовать медицинское изделие по истечении срока годности.
- Перед вскрытием проверить целостность упаковки. Не использовать, если упаковка повреждена.
- Только для однократного использования, утилизировать после использования.
- Начинать инфузию рекомендуется с введения физиологического раствора, необходимого для разбавления лекарственного препарата, затем добавить лекарственный препарат. Эта мера предосторожности предотвратит попадание неразбавленного препарата в вену пациента.
- Перед началом инфузии необходимо полностью заполнить жидкостью систему трубок, удалив из неё воздух – это обычная мера предосторожности при проведении инфузий, чтобы не допустить осложнений, связанных с воздушной эмболией.
- Помпы предназначены только для жидких лекарственных препаратов или очень небольшой вязкости, без твердых частиц, т.к. подобные вещества снижают скорость инфузии или могут засорить помпу.

Способ применения

1. Вскройте упаковку и извлеките помпу.
2. Заполните жидким лекарственным препаратом стерильный шприц (не входит в комплект поставки помпы). Удалите из шприца воздух.
3. Зажмите трубку помпы зажимом.
4. Снимите винтовую заглушку с порта и подсоедините шприц с лекарством к порту. Используйте шприц без иглы! Плавно введите инфузионную жидкость в эластичный силиконовый баллон.
5. Не заполняйте помпу больше указанного максимально допустимого объема.
6. Закройте порт винтовой заглушкой.
7. Снимите зажим, и лекарственное средство потечет по трубке.
8. Снимите защитный колпачок на конце трубки и удалите воздух.
9. Убедитесь, что помпа заполнена и жидкость капает из дистального конца трубки с ожидаемой скоростью (1 мл/ч = приблизительно 1 капля каждые 3 мин).
10. **Для моделей с регулятором скорости потока:** Установите на регуляторе максимальную скорость потока, снимите зажим, дождитесь полного удаления воздуха из трубки, установите необходимую скорость потока. В процессе инфузии скорость потока жидкости можно изменять.
11. **Для моделей с болюсом (РСА):** Перед применением удалите цветную заглушку с кнопки управления болюсным модулем, предварительно нажав на кнопку. **Несоблюдение данного пункта приведет к значительному превышению скорости инфузии!**
12. К внутривенному катетеру, либо к Люэр-коннектору иглы Губера (не входят в комплект поставки помпы) присоедините Люэр-коннектор инфузионной помпы. Убедитесь в надежности фиксации катетера, а также трубки помпы во избежание случайного извлечения катетера. Если длина трубки превышает необходимую, сверните ее плоской спиралью и прикрепите к коже пациента пластырем. Не заклеивайте пластырем поверхность фильтра.

Очистка и дезинфекция

Не применимо.

Срок годности

Срок годности помпы составляет 5 лет.

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации

Режимы	При транспортировке	При хранении	При эксплуатации
Температура	-20°C- 40°C	5°C- 40°C	5°C- 40°C
Влажность, особые условия	Менее 65%	Менее 65%	Менее 65%
Атмосферное давление	90-110 кПа	90-110 кПа	90-110 кПа

Особые указания:

- Рекомендуемая температура окружающей среды 21°- 25°С.
- При температуре ниже 21° С, увеличенной вязкости жидкости или использовании дополнительного фильтра скорость потока лекарственного средства может замедляться.
- При поднятии помпы выше места инфузии на ~ 0,5 м скорость потока увеличивается на 10 %.

Рекомендации по хранению:

- Не класть тяжелый груз сверху. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
- Хрупкое. Обращаться с осторожностью.
- Хранить в сухом, вентилируемом и чистом помещении с относительной влажностью до 65 % и без коррозионных газов.

Стерилизация

Поставляется стерильной.
Стерилизация этиленоксидом.

Упаковка

Помпа упаковывается в индивидуальную стерильную и транспортную упаковки.

Прочность на растяжение	не менее 12 МПа
Толщина упаковки	пленка – 50(±10) мкм, бумага – 80(±10) мкм
Сопротивление разрыву	не менее 20 Н
Воздухопроницаемость	200-400 см ³ /м ² ·мин
Прочность на продавливание	не менее 0,25 МПа
Ширина термоспаячного шва	≥ 6 мм
Плотность материалов упаковки	ПЭ/ПЭТ пленка 0.93 г/м ² Бумага 64.4 г/м ²
Прочность на растяжение поперечная материалов упаковки	ПЭ/ПЭТ пленка ≥170 МПа Бумага 5.11-8.90 МПа
Прочность на продавливание поперечная материалов упаковки	≥ 1.5 N/15 мм
Пористость	на впитывающей бумаге не должно обнаруживаться никаких пятен
Газопроницаемость	≥ 1 мкм / (Па · с) при 1,47 кПа

Примечание: На индивидуальной упаковке помп маркировка может быть нанесена в виде этикетки, либо напечатана на бумаге.


Размеры транспортной упаковки:

Кол-во в коробке	Д / Ш / В
40 шт. в коробке	От 520 до 590 мм / от 420 до 520 мм / от 260 до 320 мм
60 шт. в коробке	От 520 до 590 мм / от 420 до 460 мм / от 430 до 540 мм
80 шт. в коробке	От 520 до 590 мм / от 510 до 580 мм / от 430 до 540 мм

Примечание: На транспортной упаковке (на коробке) маркировка может быть нанесена в виде этикетки, либо напечатана на картоне.

Маркировка

Расшифровка маркировочных символов

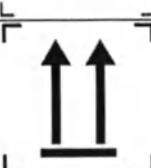	Код партии		Осторожно! Обратитесь к инструкции
	Дата изготовления		Не использовать при повреждении упаковки.
	Использовать до...		Не стерилизовать повторно
	Изготовитель		Предел температуры
	Не использовать повторно		Стерилизация этиленоксидом
	Не допускать воздействия солнечного света		Верх Хрупкий объект.
	Беречь от влаги		Нетоксично
			Апирогенно

Примечание: На индивидуальных упаковках помп, а также на транспортных коробках может быть нанесен значок добровольной (или обязательной) сертификации

Гарантийные обязательства

Помпы соответствуют требованиям эксплуатационной и технической документации при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации.

Порядок осуществления утилизации или уничтожения медицинского изделия



Неиспользованные изделия, включая изделия с истекшим сроком эксплуатации, следует утилизировать в соответствии с процедурой утилизации твердых хозяйственных отходов, установленной законодательством Российской Федерации.

Для получения дополнительной информации по вопросам утилизации обратитесь к уполномоченному представителю производителя на территории Российской Федерации.

Помпы после использования должны утилизироваться местными публично-правовыми организациями как отходы класса Б, в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Помпы, которые имеют нарушения герметичности упаковки, и помпы с истекшим сроком годности должны утилизироваться местными публично-правовыми организациями как отходы класса А, в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Требования по охране окружающей среды

С учетом выполнения требований эксплуатационной документации помпы при использовании, транспортировке и хранении не оказывают негативного воздействия на человека и окружающую среду.

Перечень международных нормативных документов/ стандартов, которым соответствует медицинское изделие

- EN ISO 14971 Медицинские изделия – Применение управления рисками к медицинским изделиям.
- EN ISO 13485 Системы управления качеством – медицинские изделия.
- ISO 11135-1 Стерилизация медицинских изделий. Окись этилена. Часть 1. Требования к разработке, аттестации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий.
- ISO 15223-1 Медицинские изделия – символы, используемые с этикетками медицинских изделий.
- ISO 594-2 Детали соединительные с конусностью 6% (по Люэру) для шприцев, игл и некоторых других видов медицинского оборудования — Часть 2: Люэровские наконечники
- ISO 11607 1 и 2 части Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации
- IEC 62366 Медицинские устройства — Часть 1: Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности.

Рекламация

Производитель гарантирует соответствие данного медицинского изделия заявленным характеристикам в пределах сохранения срока его стерильности, при условии, что пользователь соблюдает требования, указанные к эксплуатационной документации производителя.

Все рекламации принимаются уполномоченным представителем производителя:
Общество с ограниченной ответственностью «МЕРИДИАН МЕДИКАЛ»
(ООО «МЕРИДИАН МЕДИКАЛ»)

121170, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Дорогомилово, пр-кт Кутузовский, д. 36, стр. 2, этаж 2, помещ. 1, ком. 10

+7 495 987-36-06

info@meridian-med.ru

[Перевод с английского языка на русский язык]

[Перевод подписей, печатей и штампов на документе «Инструкция по применению в отношении изделия „Помпа инфузионная MERIDIAN одноразовая, стерильная в индивидуальной упаковке в вариантах исполнения“», представленном на английском и русском языках.]

Лэнгли Хаус, Парк Роуд, Лондон, N2 8EY, Великобритания
(Langley House, Park Road, London, N2 8EY, United Kingdom)

Директор

Врина Мария Томе

31 марта 2023 г.

/подпись/

[Печать компании «Меридиан Медикал Продактс Лтд.»]

[Штамп:

Подписано (или скреплено печатью) сегодня в моем присутствии ВРИНОЙ МАРИЕЙ ТОМЕ. Выступая в качестве нотариуса, я удостоверяю только подпись, стоящую на документе, и не несу ответственности за содержание настоящего документа. В свидетельство чего ставлю свою подпись и официальную печать 31 марта 2023 г.

/подпись/


Михалакис Савва

Нотариус]

[Печать нотариуса]

[Марка уплаты госпошлины]

Текст данного документа перевёл переводчик Рахимкулов Эльдар Серкалиевич. Знание иностранного языка подтверждаю. Выполненный перевод является правильным, точным и полным.

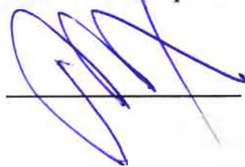

Российская Федерация
Город Москва


Семнадцатого апреля две тысячи двадцать третьего года

Я, Точкин Дмитрий Валерьевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Рахимкулова Эльдара Серкалиевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2079-н/77-2023- 9-8
Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб.

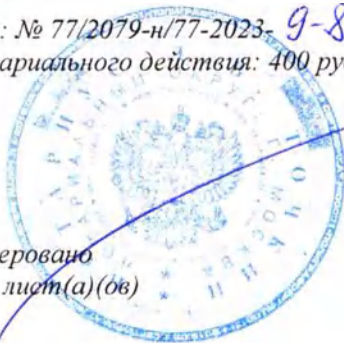

Д.В. Точкин

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью __57__ лист(а)(ов)

Нотариус

