

Общество с Ограниченной Ответственностью НПО «ТЕХПРОФМЕД»

454080 г. Челябинск, ул. Коммуны, дом 129, пом. 5 тел.8(351)2170803, 89000956959, ОГРН 1177456011358,
ИНН/КПП 7449133023/745301001, элек.адрес: milana-7475@mail.ru,

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор



ООО НПО «ТЕХПРОФМЕД»

М.Г. Балькин

«15» сентября 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

«Набор для крови с мешками полимерными стерильными однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов, пустыми и с растворами гемоконсервантов»

Производства:

Suzhou Laishi Transfusion Equipment Co., Ltd. (Сучжоу Лайши Трансфьюжн Эквипмент Ко., Лтд.),
Changsheng Road, Tongli Town, 215217, Wujiang City, Jiangsu province, China (Ул. Чаншэн, городок
Тунли, 215217, г. Уцзян, провинция Цзянсу, Китай).

Варианты исполнения:


Набор для крови с одинарным мешком полимерным стерильным однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов, пустыми и с растворами гемоконсервантов ЦФДА-1, с протектором иглы, адаптером для вакуумной пробирки



Набор для крови с двойным мешком полимерным стерильным однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов, пустыми и с растворами гемоконсервантов ЦФДА-1, с протектором иглы, адаптером для вакуумной пробирки



Набор для крови с строенным мешком полимерным стерильным однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов, пустыми и с растворами гемоконсервантов ЦФДА-1, с протектором иглы, адаптером для вакуумной пробирки

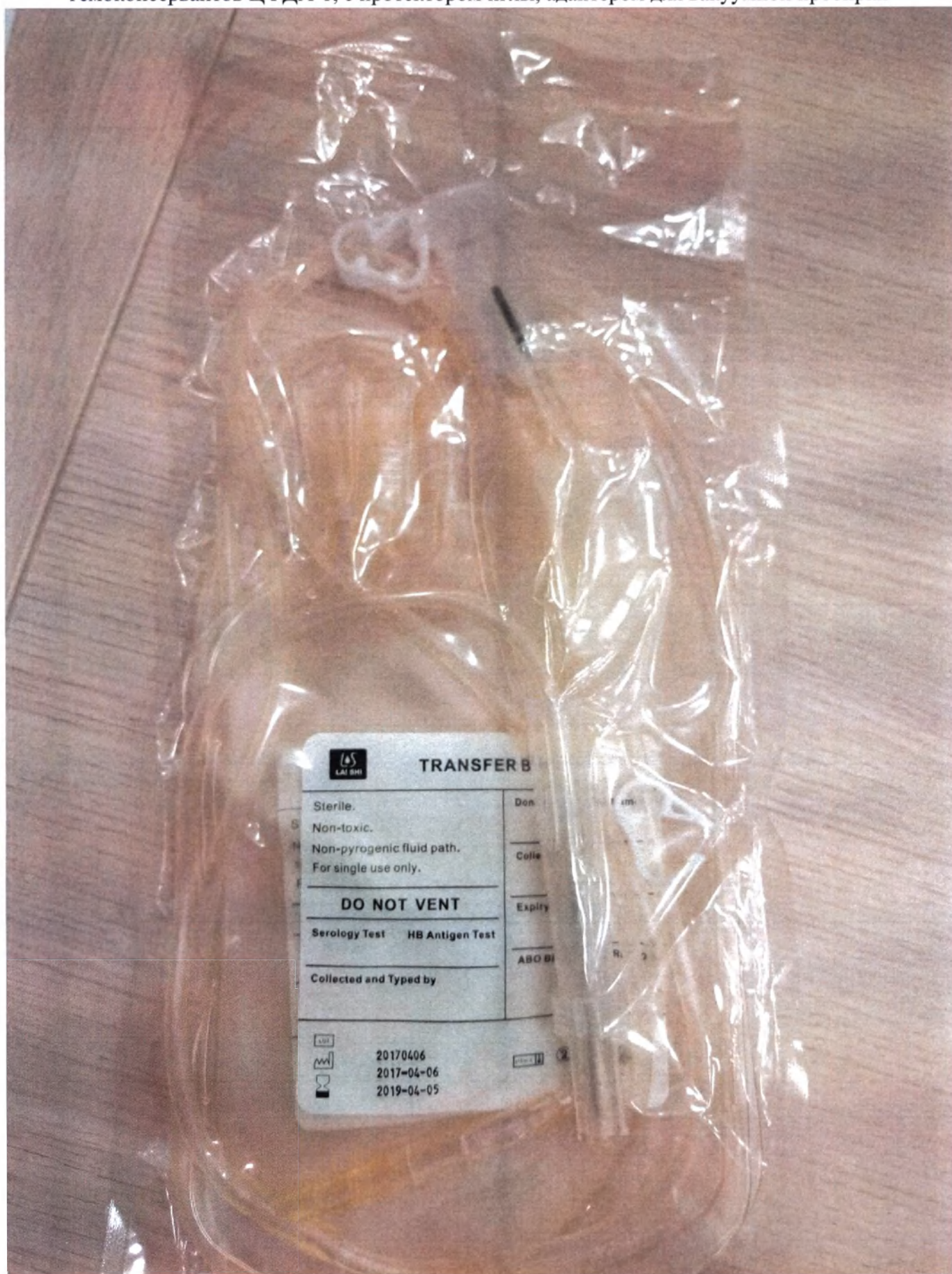

Набор для крови с встроенным мешком полимерным стерильным однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов, пустыми и с растворами гемоконсервантов ЦФД/САГМ, встроенный в систему мешок для хранения тромбоцитов 5 дней, с протектором иглы, адаптером для вакуумной пробирки и мешком для образцов крови



Набор для крови с счетверенным мешком полимерным стерильным однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов, пустыми и с растворами гемоконсервантов ЦФДА-1, с протектором иглы, адаптером для вакуумной пробирки и мешком для образцов крови



Набор для крови с счетверенным мешком полимерным стерильным однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов, пустыми и с растворами гемоконсервантов ЦФД/САГМ, встроенный в систему мешок для хранения тромбоцитов 5 дней, с протектором иглы, адаптером для вакуумной пробирки и мешком для образцов крови



Набор для крови с счетверенным мешком полимерным стерильным однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов, пустыми и с растворами гемоконсервантов ЦФД/САГМ, с протектором иглы, адаптером для вакуумной пробирки, мешком для образцов крови и лейкоцитарным фильтром (твердым)



Набор для крови с счетверенным мешком полимерным стерильным однократного применения для взятия, хранения и транспортировки крови и её компонентов, пустыми и с растворами гемоконсервантов ЦФД/САГМ, встроенный в систему мешок для хранения тромбоцитов 5 дней, с протектором иглы, адаптером для вакуумной пробирки, мешком для образцов крови и лейкоцитарным фильтром (мягким)



Вторичная (потребительская, стерильная) упаковка





LAI SHI BLOOD BAG

CPD WHOLE BLOOD (HUMAN) 450 ML

For the collection of a blood volume: 450 ml.
Is filled with 63 ml of CPD anticoagulant solution.

Each 100 ml CPD (U.S.P) contains:

Citric Acid (anhydrous).....	0.299 g.
Sodium Citrate (dihydrate).....	2.63 g.
Monobasic Sodium Phosphate (monohydrate).....	0.222 g.
Dextrose (monohydrate).....	2.55 g.

Water for injection, a sufficient quantity to make.....100ml.

Needle: 16 gauge.
Steam sterilization.
Sterile, non-toxic, non-pyrogenic fluid path.

STERILE



	600 ml
	CPD 63 ml
	450 ml

DO NOT VENT

 **CAUTIONS:**

- 1) For single use only.
- 2) The blood bag should be used for collection within 10 days of opening the aluminium pack and prior to the expiry date.
- 3) Do not use unless the anticoagulant is clear.
- 4) Cross-match before transfusion.
- 5) Dispose only against a physician's prescription.
- 6) Do not add medication to this blood.
- 7) Mix blood and anticoagulant at several times during collection.
- 8) Dispose of used/rejected bags by incineration to avoid contamination and infection.
- 9) Store blood between +2°C and +6°C.

Donor Number and Name

Collection Date Expiry Date

ABO Blood Group Rh Type

Serology Test

Collected and Typed by

REF	Q450
LOT	20170405
	2017-04-05
	2019-04-04



SUZHOU LAISHI TRANSFUSION EQUIPMENT CO., LTD.
Changsheng Road, Tongli Town, Wujiang City
Jiangsu Province, 215217, China

EC REP

LOTUS GLOBAL CO., LTD.
Add: 1 Four Seasons Terrace
West Drayton, Middlesex
London, UB7 9GG, U.K.



СЧЕТВЕРЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ И ЕЁ КОМПОНЕНТОВ

ОБЪЁМ: 450 мл

1

Для забора объема крови: 450 мл.
Содержит 63 мл раствора антикоагулянта ЦФД.
Каждые 100 мл ЦФД (Ф,США) содержат:

Лимонная кислота (безводная) 0,299 г.
Натрия цитрат (дигидрат) 2,63 г.
Однозамещенный фосфорнокислый натрий (моногоидрат) 0,222 г.
Декстроза (моногоидрат) 2,55 г.
Вода для инъекций, достаточное количество для доведения 100 мл.
Игла: 16 калибр.
Стерилизация паром.
Стерильная, нетоксичная,
апиrogenная система циркуляции диализата.



STERILE

PHT

DEHP

НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ ВОЗДУХА



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:



- 1) Только для одноразового применения.
- 2) Контейнер для крови необходимо использовать для забора крови в течение 10 дней после открытия пакета из алюминиевой фольги и до истечения срока годности.
- 3) Не используйте, если антикоагулянт непрозрачный.
- 4) Перед трансфузией проверьте совместимость крови донора и реципиента.
- 5) Утилизируйте исключительно по предписанию врача.
- 6) Не добавляйте лекарственные препараты в этот образец крови.
- 7) Несколько раз смешайте кровь и антикоагулянт во время забора.
- 8) Утилизируйте использованные/отбракованные контейнеры путем их сжигания с целью избежать загрязнения и инфицирования.
- 9) Храните компоненты крови при температуре от +2°C до +6°C.



	600 мл
	ЦФД 63 мл
	450 мл

Номер и имя донора

Дата забора
крови

Дата окончания
срока годности

Группа крови
по системе ABO

Резус-фактор

Серологический анализ крови

Забор и печать произвела

REF Q-450

LOT 20210043

2021-07

2023-06



СУЧЖОУ ЛАЙШИ ТРАНСФУЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КО., ЛТД.
(SUZHOU LAISHI TRANSFUSION EQUIPMENT CO., LTD.)
ул. Чжаншэн-Роуд, Тонгли-Таун, г. Уцзян, провинция Цзянсу, 215217,
Китайская Народная Республика (Changsheng Road, Tongli Town,
Wujiang City Jiangsu Province, 215217, China)

EC REP

Линс Сервис унд Консалтинг ГмбХ (Lins Service &
Consulting GmbH) Обере Зеерассе 34/2, 69124
Гейдельберг (Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg)

CE 0197

Дистрибьютор: ООО НПО "ТЕХПРОФМЕД", 454080 РФ, Челябинск, ул. Коммуны, д. 129, помещение 5.
Рег. Уд. № Номер РЗН 2020/11756 от 18 августа 2020 г.

СЧЕТВЕРЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ КРОВИ И ЕЁ КОМПОНЕНТОВ, ПУСТОЙ

ОБЪЁМ: 400 мл

2



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:



- 1) Только для одноразового применения.
- 2) Контейнер для крови необходимо использовать для забора крови в течение 10 дней после открытия пакета из алюминиевой фольги и до истечения срока годности.
- 3) Не используйте, если антикоагулянт непрозрачный.
- 4) Перед трансфузией проверьте совместимость крови донора и реципиента.
- 5) Утилизируйте исключительно по предписанию врача.
- 6) Не добавляйте лекарственные препараты в этот образец крови.
- 7) Несколько раз смешайте кровь и антикоагулянт во время забора.
- 8) Утилизируйте использованные/отбракованные контейнеры путем их сжигания с целью избежать загрязнения и инфицирования.
- 9) Храните компоненты крови при температуре от +2°C до +6°C.
- 10) Не проводите трансфузию при обнаружении гемолиза или очевидных аномалий.

Стерилизация паром.

Стерильная, нетоксичная, апиrogenная система циркуляции, диализата.



**НЕ ДОПУСКАТЬ
ПОПАДАНИЯ ВОЗДУХА**



Цельная кровь в ЦФД
ЛЕЙКОРЕДУКЦИЯ



Номер и имя донора

Дата забора
крови

Дата окончания
срока годности

Группа крови
по системе ABO

Резус-фактор

Серологический анализ крови

Забор и печать произвела

REF Q-450

LOT 20210043

2021-07

2023-06



EC REP

СУЧЖОУ ЛАЙШИ ТРАНСФУЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КО., ЛТД.
(SUZHOU LAISHI TRANSFUSION EQUIPMENT CO., LTD.)
ул. Чжаншэн-Роуд, Тонгли-Таун, г. Уцзян, провинция Цзянсу, 215217,
Китайская Народная Республика (Changsheng Road, Tongli Town,
Wujiang City Jiangsu Province, 215217, China)

Линс Сервис унд Консалтинг ГмбХ (Lins Service &
Consulting GmbH) Обере Зеерассе 34/2, 69124
Гейдельберг (Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg)

CE 0197

Дистрибьютор: ООО НПО "ТЕХПРОФМЕД", 454080 Рф, Челябинск, ул. Коммуны, д. 129, помещение 5,
Рег. Уд. № Номер РЗН 2020/11756 от 18 августа 2020 г.

Пример маркировки мешка для крови

НАБОР ДЛЯ КРОВИ С СЧЕТВЕРЕННЫМ МЕШКОМ ПОЛИМЕРНЫМ СТЕРИЛЬНЫМ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 450 МЛ ДЛЯ ВЗЯТИЯ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ, С РАСТВОРАМИ ГЕМОКОНСЕРВАНТОВ ЦФД/САГМ, С ПРОТЕКТОРОМ ИГЛЫ, АДАПТЕРОМ ДЛЯ ВАКУУМНОЙ ПРОБИРКИ И МЕШКОМ ДЛЯ ОБРАЗЦОВ КРОВИ И ЛЕЙКОЦИТАРНЫМ ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫМ (WBC)

ИГЛА: 16G

Каждые 100 мл ЦФД содержат:

Лимонная кислота (безводная) Ф.США 0,299 г.

Натрия цитрат (дигидрат) Ф.США 2,63 г.

Однозамещенный фосфорнокислый натрий (моногидрат) Ф.США 0,222 г.

Декстроза (моногидрат) Ф.США 2,55 г.

Вода для инъекций 100 мл.

Каждые 100 мл раствора САГМ содержат:

Натрия хлорид Ф.США 0,877 г.

Аденин Ф.США 0,0169 г.


Декстроза (моногидрат) Ф.США 0,900 г.

Маннитол Ф.США 0,525 г.

Вода для инъекций 100 мл.

Стерильная, нетоксичная, апиrogenная система циркуляции диализата.

Стерилизация паром.

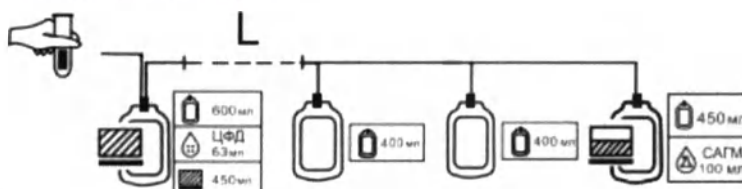

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:


- 1) Не используйте контейнер для крови спустя 10 дней после открытия пакета из алюминиевой фольги.
- 2) Не используйте при наличии видимых признаков порчи.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

- 1) Неиспользованный пакет можно хранить при комнатной температуре менее 30°C, относительной влажности менее 60%, а пакет с кровью необходимо хранить при температуре от +2°C до +6°C.
- 2) Избегайте повышенных температур и воздействия прямых солнечных лучей.



СУЖОУ ЛАЙШИ ТРАНСФУЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КО., ЛТД.
(SUZHOU LAISHI TRANSFUSION EQUIPMENT CO., LTD.)
ул. Чжаншэн-Роуд, Тонгли-Таун, г. Уцзян, провинция Цзянсу, 215217,
Китайская Народная Республика (Changsheng Road, Tongli Town,
Wujiang City Jiangsu Province, 215217, China)

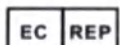

Пленис Сервис энд Консалтинг ГмбХ (Lins Service &
Consulting GmbH) Обере Зеерассе 34/2, 69124
Гейдельберг (Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg)

Дистрибьютор: ООО НПО "ТЕХПРОФМЕД", 454080 РФ,
Челябинск, ул. Коммуны, д. 129, помещение 5.
Рег. Уд. № Номер РЗН 2020/11756 от 18 августа 2020 г.

REF Q-450

LOT 20210043

2021-07

2023-06

3 КОМПЛЕКТА

