

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Спец Тех»



Нигматов Л.Р

«03» ноября 2017 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


**УСТРОЙСТВА (СИСТЕМЫ) КОМПЛЕКТНЫЕ ИНФУЗИОННЫЕ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЕ**

По ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Спец Тех»
420108, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мазита Гафури, д. 71, зд. 216

Адрес места производства: 420108, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Мазита Гафури, д. 71, нежилое помещение №1Н, производственный участок №13



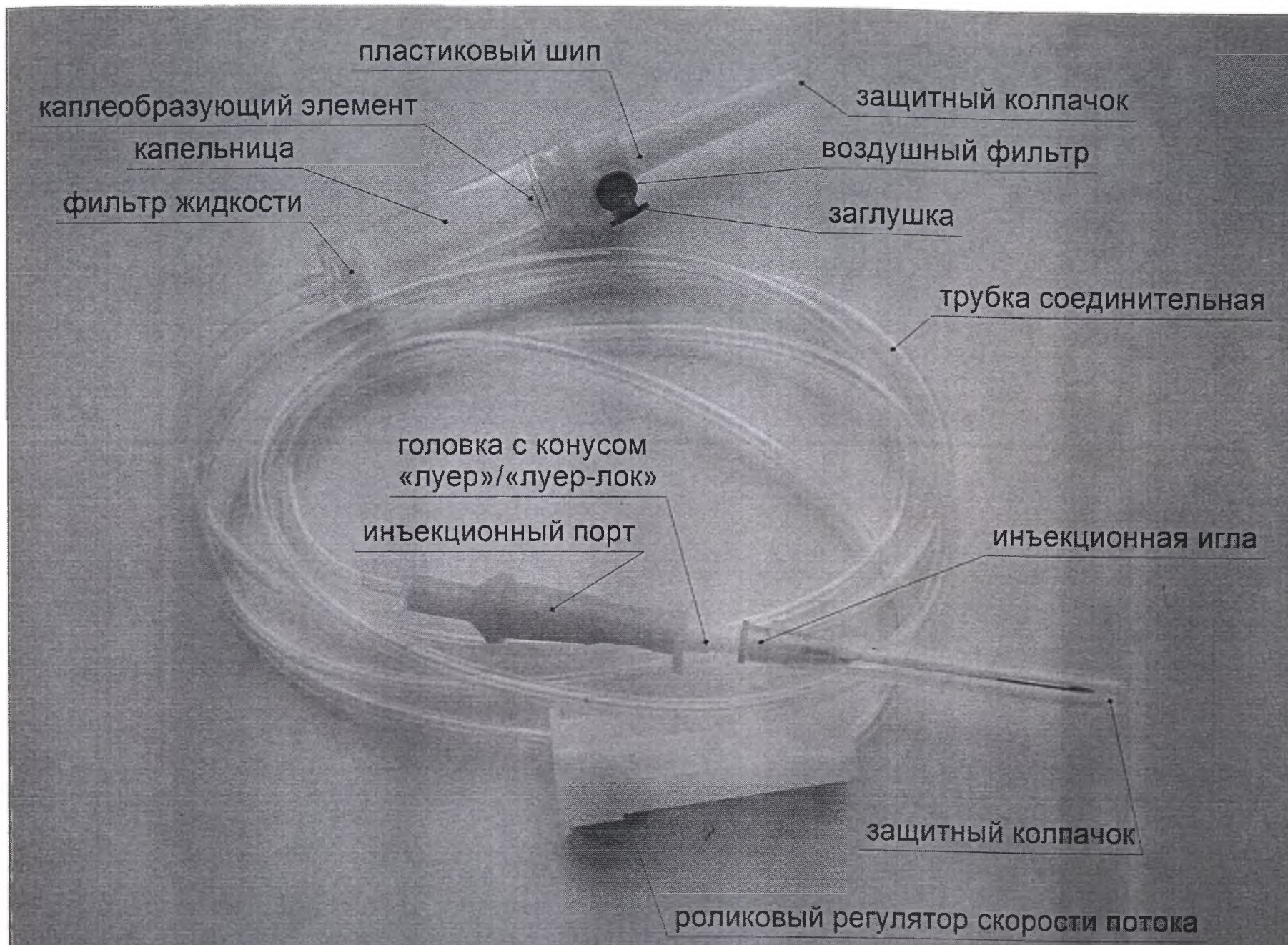

3. Общий вид потребительской тары с маркировкой «Устройство (система) комплектное инфузионное однократного применения стерильное ПР 23-03 по ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

Устройство (система) комплектное инфузионное однократного применения стерильное ПР 23-03 по ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

Способ применения:

1. Вскройте упаковку и достаньте устройство.
2. Отрегулируйте зажим по высоте и плотно закройте его.
3. Подготовьте емкость (бутылку или контейнер) с инфузионным раствором.
4. Снимите колпачок с шипа, введите шип на всю длину в емкость с инфузионным раствором.
5. Переверните емкость и установите на штативе.
6. Плотно соедините инъекционную иглу с головкой с конусом «луер»/«луер-лок».
7. Сдавите капельницу и заполните ее до половины объема.
8. Откройте заглушку воздуховода при работе со стеклянными бутылками (флаконами).
9. Откройте роликовый регулятор и медленно заполните трубку устройства, после закройте.
10. Убедитесь в отсутствии пузырьков воздуха в трубке устройства.
11. Обработайте место венопункции антисептиком;
12. Снимите колпачок с инъекционной иглы и произведите венопункцию.
13. Отрегулируйте зажимом необходимую скорость вливания.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать устройство более 24 часов. Вводите лекарственные препараты через инъекционный узел при закрытом зажиме, применяя иглы диаметром не более 0,8 мм. Следите за отсутствием пузырьков воздуха внутри устройства и за уровнем инфузионной среды в емкости в процессе вливания и особенно в конце для исключения воздушной эмболии.

Хранить изделия в упаковке предприятия-изготовителя, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80%, на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Не применять при нарушении целостности потребительской тары!

Осторожно! обратитесь к инструкции по применению.

Производитель: ООО «Спец Тех», Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 71, зд. 216


ПУ № _____ от _____ г.

ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

Размер иглы: 0,8x38 мм

- СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ
- АПИРОГЕННО • НЕТОКСИЧНО
- ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

STERILE EO

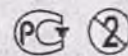

/Дата изготовления: 201704

LOT/Партия №: 201704

/Годен до: 202203

4. Общий вид потребительской тары с маркировкой «Устройство (система) комплектное инфузионное однократного применения стерильное ПР 23-02 по ТУ 32.50.13-003-67743762-2017»

Устройство (система) комплектное инфузионное однократного применения стерильное ПР 23-02 по ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

Способ применения:

1. Вскройте упаковку и достаньте устройство.
2. Отрегулируйте зажим по высоте и плотно закройте его.
3. Подготовьте емкость (бутылку или контейнер) с инфузионным раствором.
4. Снимите колпачок с шипа, введите шип на всю длину в емкость с инфузионным раствором.
5. Переверните емкость и установите на штативе.
6. Плотно соедините инъекционную иглу с головкой с конусом «луер»/«луер-лок».
7. Сдавите капельницу и заполните ее до половины объема.
8. Откройте заглушку воздуховода при работе со стеклянными бутылками (флаконами).
9. Откройте зажим и медленно заполните трубку устройства. Закройте зажим.
10. Убедитесь в отсутствии пузырьков воздуха в трубке устройства.
11. Обработайте место венопункции антисептиком;
12. Снимите колпачок с инъекционной иглы и произведите венопункцию.
13. Отрегулируйте зажимом необходимую скорость вливания.

ОТКРЫВАТЬ ЗАПЕЧАТАННУЮ ЗАГЛУШКУ ВОЗДУХОВОДА

ВНИМАНИЕ!

Не использовать устройство более 24 часов. Вводите лекарственные препараты через инъекционный узел около капельницы при открытом зажиме, применяя иглы диаметром не более 0,8 мм. Следите за отсутствием пузырьков воздуха внутри устройства и за уровнем инфузионной среды в емкости в процессе вливания и особенно в конце для исключения воздушной эмболии.

Хранить изделия в упаковке предприятия-изготовителя, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80%, на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

Не применять при нарушении целостности потребительской тары!

Осторожно! обратитесь к инструкции по применению.

Производитель: ООО «Спец Тех», Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 71, зд. 216


ПУ № _____ от _____ г.

ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

Размер иглы: 0,8x38 мм

- СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ
- АПИРОГЕННО • НЕТОКСИЧНО
- ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

STERILE EO

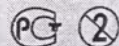


Дата изготовления: 201704


LOT/Партия №: 201704

Годен до: 202203

5. Общий вид потребительской тары (с обратной стороны) «Устройство (система) комплектное инфузионное однократного применения стерильное ПР 23-03» по ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

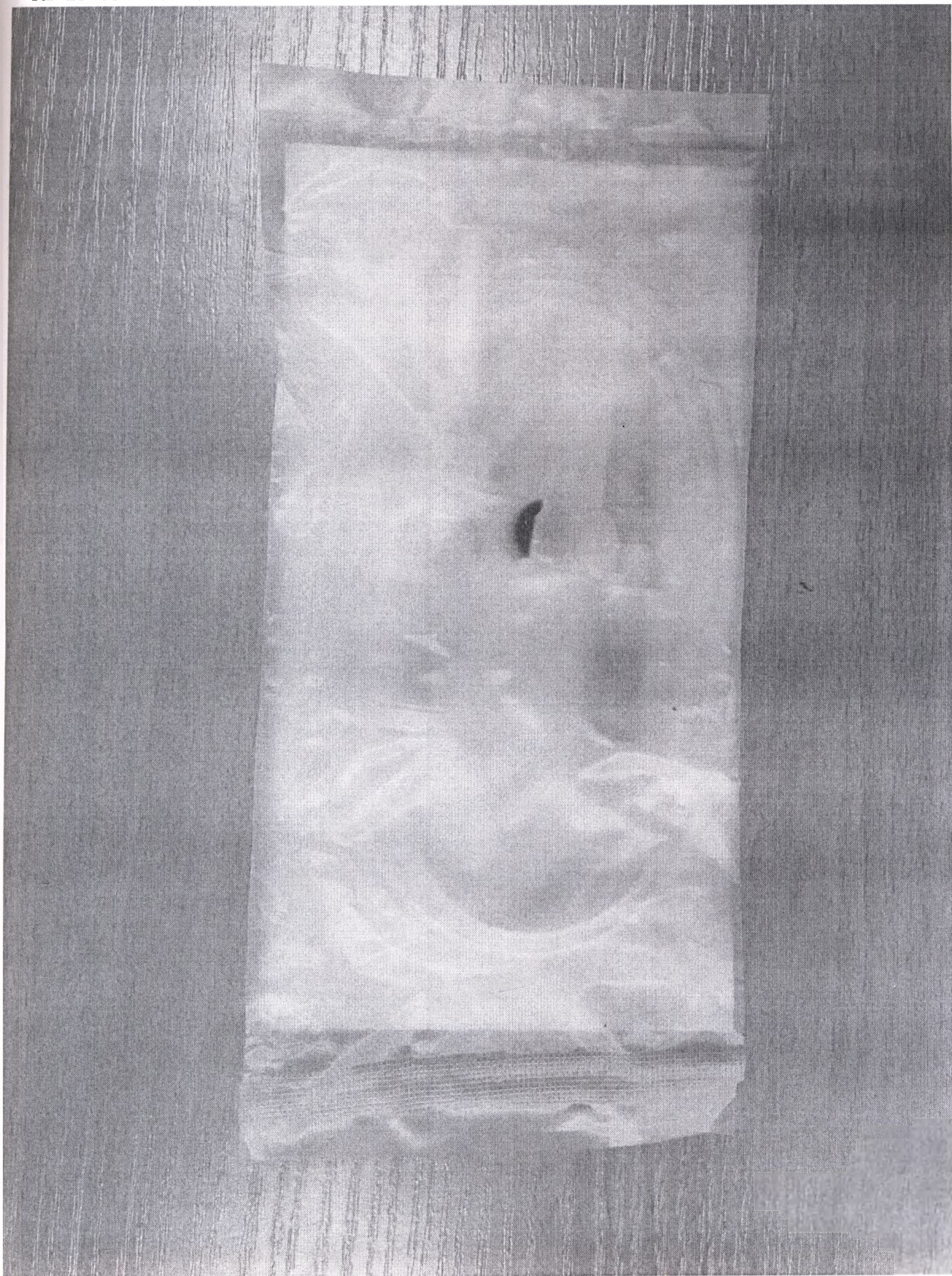

6. Общий вид потребительской тары (с обратной стороны) «Устройство (система) комплектное инфузионное однократного применения стерильное ПР 23-02 по ТУ 32.50.13-003-67743762-2017»

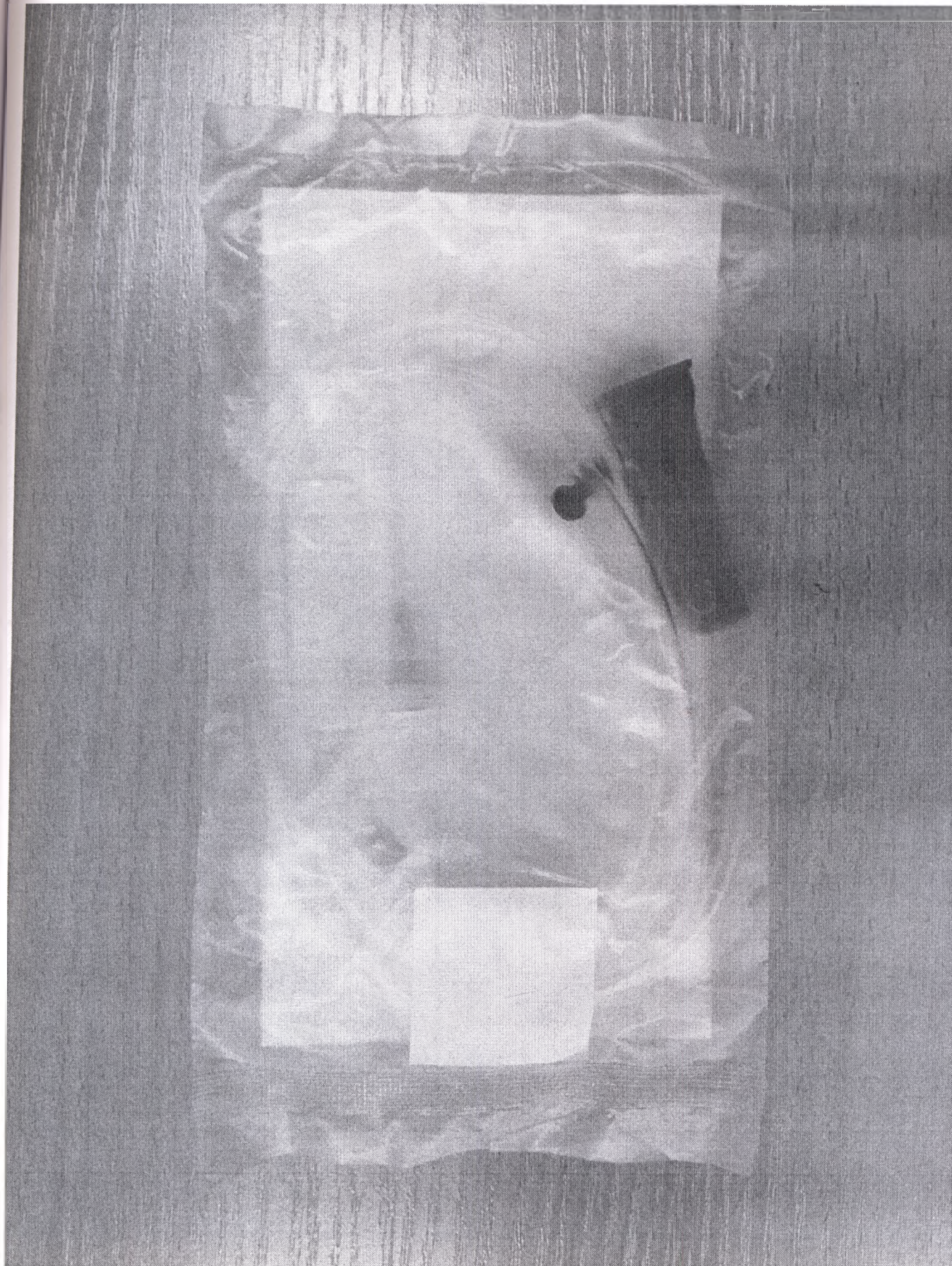

7. Общий вид групповой тары «Устройство (система) инфузионное однократного применения стерильное ПР 23-03 по ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

Устройство (система) комплектное инфузионное однократного применения стерильное ПР 23-03 по ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

Упаковщик № 2

Размер иглы: 0,8x38 мм

LOT/Партия №: 201704

STERILE EO


Количество изделий: 30

Производитель: ООО "Спец Тех", Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 71, зд. 216


РУ № _____ от _____ г.

ТУ 32.50.13-003-67743762-2017


8. Общий вид групповой тары «Устройство (система) комплектное инфузионное однократного применения стерильное ПР 23-02» по ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

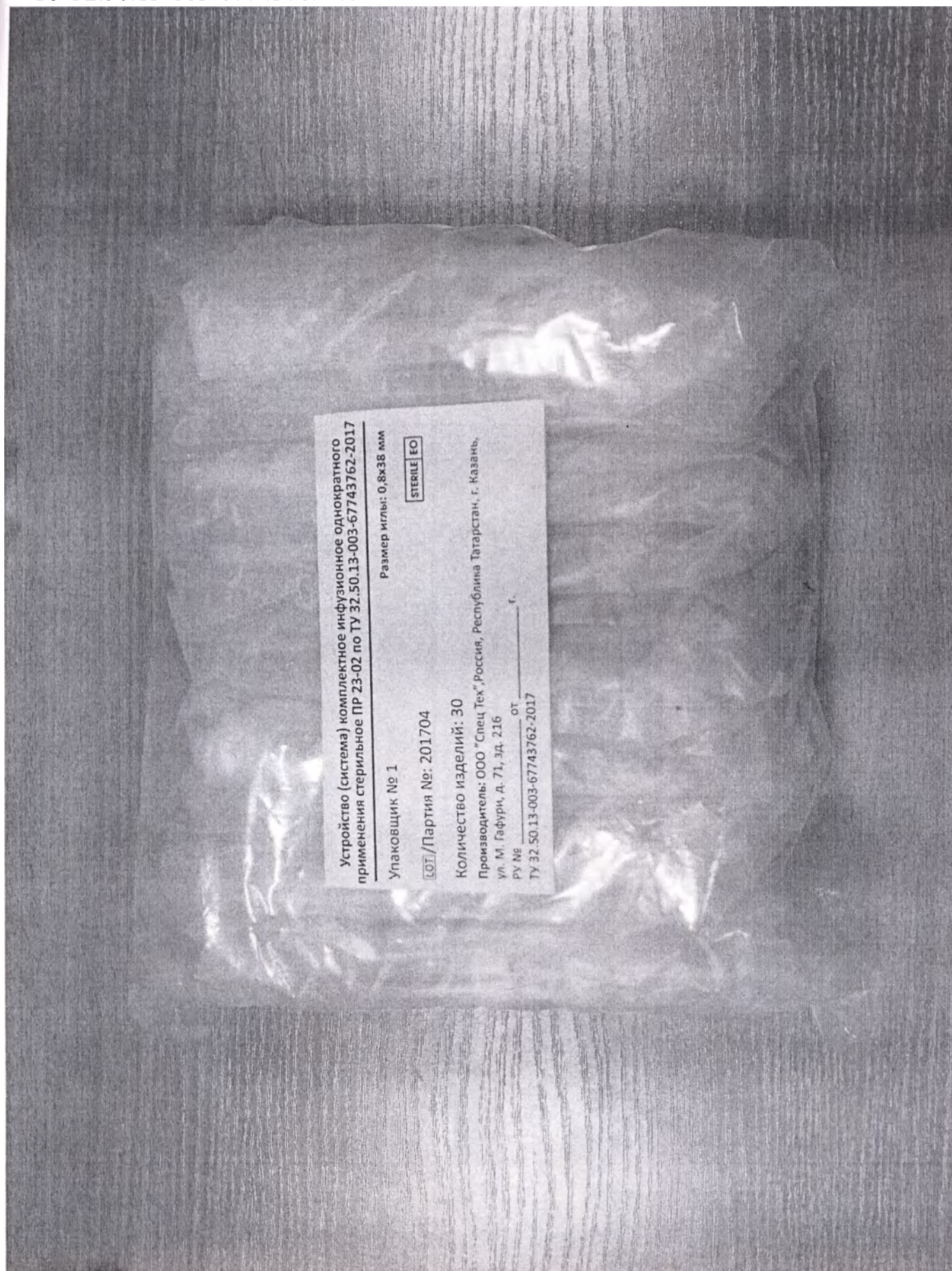

9. Общий вид транспортной тары «Устройство (система) комплектное инфузионное однократного применения стерильное ПР 23-03» по ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

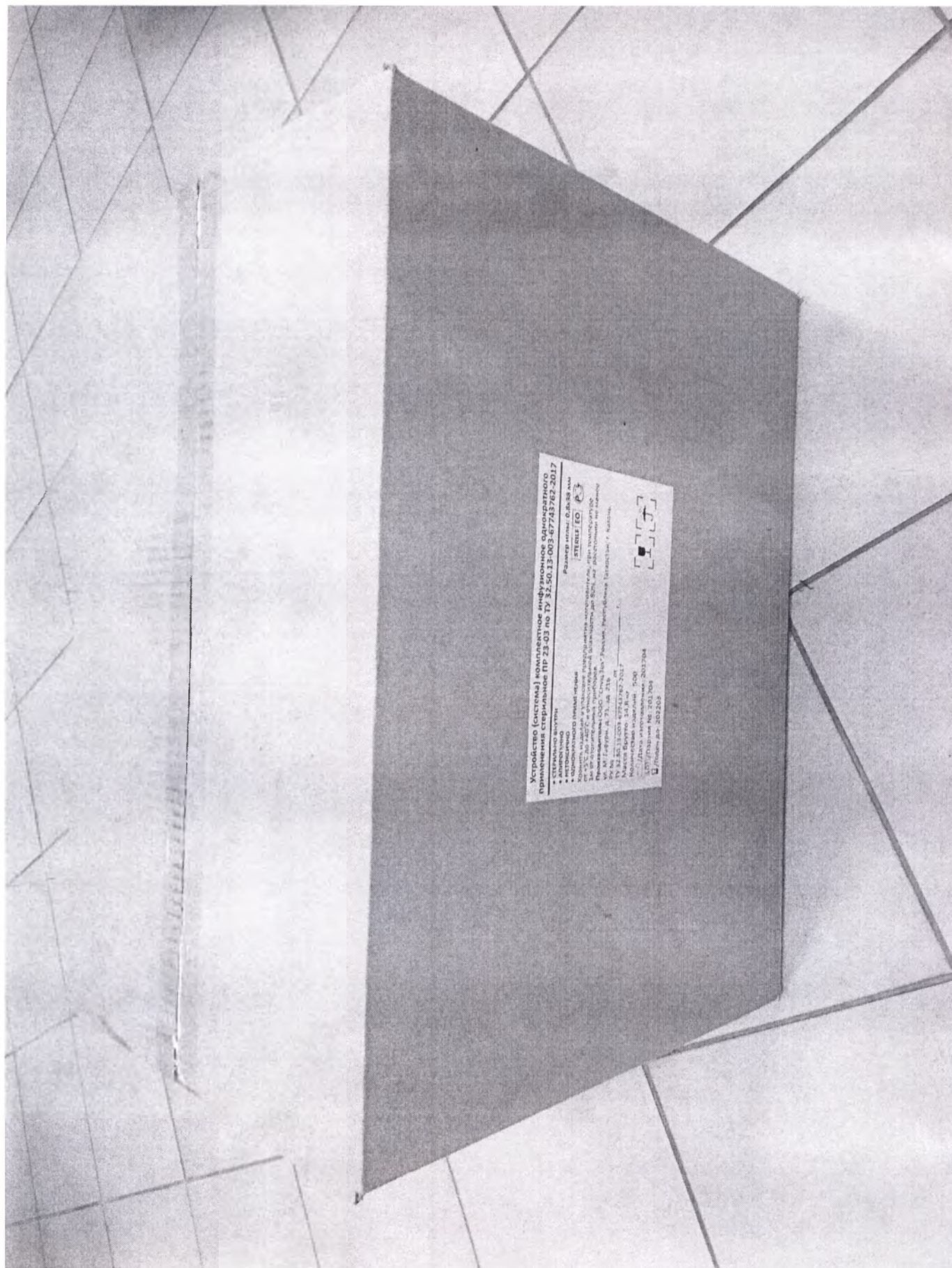

10. Общий вид транспортной тары «Устройство (система) комплектное инфузионное однократного применения стерильное ПР 23-02» по ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

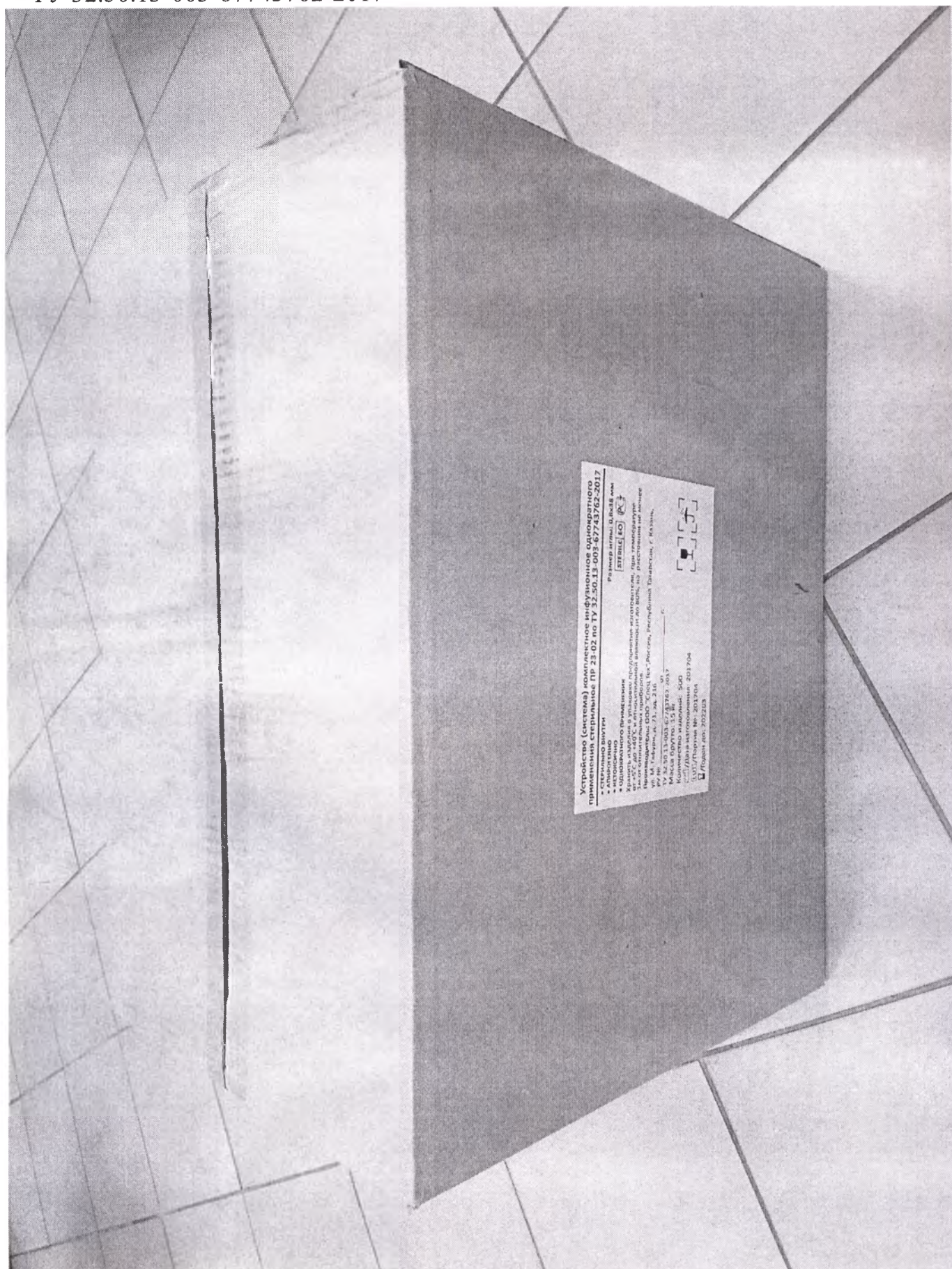

В данном документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 11

(Одиннадцать) листов

Генеральный директор _____ Нигматов Л.Р.



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Спец Тех»
Нигматов Л.Р.



ШАБЛОНЫ МАРКИРОВОК МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**УСТРОЙСТВА (СИСТЕМЫ) КОМПЛЕКТНЫЕ ИНФУЗИОННЫЕ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЕ
По ТУ 32.50.13-003-67743762-2017**

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Спец Тех»
420108, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. МазитаГафури, д. 71, зд.
216

Адрес места производства: 420108, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. МазитаГафури, д. 71, нежилое помещение №1Н, производственный
участок №13

Устройство (система) комплектное инфузионное однократного применения стерильное ПР 23-02 по ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

Способ применения:

1. Вскройте упаковку и достаньте устройство.
2. Отрегулируйте зажим по высоте и плотно закройте его.
3. Подготовьте емкость (бутылку или контейнер) с инфузионным раствором.
4. Снимите колпачок с шипа, введите шип на всю длину в емкость с инфузионным раствором.
5. Переверните емкость и установите на штативе.
6. Плотно соедините инъекционную иглу с головкой с конусом «луер»/«луер-лок».
7. Сдавите капельницу и заполните ее до половины объема.
8. Откройте заглушку воздуховода при работе со стеклянными бутылками (флаконами).
9. Откройте зажим и медленно заполните трубку устройства. Закройте зажим.
10. Убедитесь в отсутствии пузырьков воздуха в трубке устройства.
11. Обработайте место венепункции антисептиком;
12. Снимите колпачок с инъекционной иглы и произведите венепункцию.
13. Отрегулируйте зажимом необходимую скорость вливания.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать устройство более 24 часов. Вводите лекарственные препараты через инъекционный узел около капельницы при открытом зажиме, применяя иглы диаметром не более 0,8 мм. Следите за отсутствием пузырьков воздуха внутри устройства и за уровнем инфузионной среды в емкости в процессе вливания и особенно в конце для исключения воздушной эмболии.

Хранить изделия в упаковке предприятия-изготовителя, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80%, на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

Не применять при нарушении целостности потребительской тары!

Осторожно! обратитесь к инструкции по применению.

Производитель: ООО "Спец Тех", Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 71, зд. 216

РУ № _____ от _____ г.

ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

Размер иглы: 0,8x38 мм

- СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ
- АПИРОГЕННО • НЕТОКСИЧНО
- ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

STERILE EO



/Дата изготовления: _____

LOT/Партия №: _____

/Годен до: _____

Устройство (система) комплектное инфузионное однократного применения стерильное ПР 23-03 по ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

Способ применения:

1. Вскройте упаковку и достаньте устройство.
2. Отрегулируйте зажим по высоте и плотно закройте его.
3. Подготовьте емкость (бутылку или контейнер) с инфузионным раствором.
4. Снимите колпачок с шипа, введите шип на всю длину в емкость с инфузионным раствором.
5. Переверните емкость и установите на штативе.
6. Плотно соедините инъекционную иглу с головкой «луер»/«луер-лок».
7. Сдавите капельницу и заполните ее до половины объема.
8. Откройте заглушку воздуховода при работе со стеклянными бутылками (флаконами).
9. Откройте роликовый регулятор и медленно заполните трубку устройства, после закройте.
10. Убедитесь в отсутствии пузырьков воздуха в трубке устройства.
11. Обработайте место венепункции антисептиком;
12. Снимите колпачок с инъекционной иглы и произведите венепункцию.
13. Отрегулируйте зажимом необходимую скорость вливания.

ВНИМАНИЕ!

Не использовать устройство более 24 часов. Вводите лекарственные препараты через инъекционный узел при закрытом зажиме, применяя иглы диаметром не более 0,8 мм. Следите за отсутствием пузырьков воздуха внутри устройства и за уровнем инфузионной среды в емкости в процессе вливания и особенно в конце для исключения воздушной эмболии.

Хранить изделия в упаковке предприятия-изготовителя, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80%, на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

Не применять при нарушении целостности потребительской тары!

Осторожно! обратитесь к инструкции по применению.

Производитель: ООО "Спец Тех", Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 71, зд. 216

РУ № _____ от _____ г.

ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

Размер иглы: 0,8x38 мм

- СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ
- АПИРОГЕННО • НЕТОКСИЧНО
- ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

STERILE EO



ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

/Дата изготовления: _____

/Партия №: _____

/Годен до: _____

3. Общий вид маркировки групповой тары изделия «Устройство (система) комплексное инфузионное однократного применения стерильное ПР 23-02 по ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

Устройство (система) комплексное инфузионное однократного применения стерильное ПР 23-02 по ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

Упаковщик № _____

Размер иглы: 0,8х38 мм

LOT/Партия №: _____

STERILE EO

Количество изделий: _____

Производитель: ООО "Спец Тех", Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. М. Гафури, д. 71, зд. 216

РУ № _____ от _____ г.

ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

4. Общий вид маркировки Групповой тары изделия «Устройство (система) комплектное инфузионное однократного применения стерильное ПР 23-03 по ТУ 32.50.13-003-67743762-2017»

Устройство (система) комплектное инфузионное однократного применения стерильное ПР 23-03 по ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

Упаковщик № _____

Размер иглы: 0,8x38 мм

LOT /Партия №: _____

STERILE EO

Количество изделий: _____

Производитель: ООО "Спец Тех", Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 71, зд. 216

РУ № _____ от _____ г.

ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

Устройство (система) комплектное инфузионное однократного применения стерильное ПР 23-02 по ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

- СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ
- АПИРОГЕННО
- НЕТОКСИЧНО
- ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Размер иглы: 0,8x38 мм



Хранить изделия в упаковке предприятия-изготовителя, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80%, на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

Производитель: ООО "Спец Тех", Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 71, зд. 216

РУ № _____ от _____ г.

ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

Масса брутто: ____ кг

Количество изделий: ____

 /Дата изготовления: _____

 /Партия №: _____

 /Годен до: _____



Устройство (система) комплектное инфузионное однократного применения стерильное ПР 23-03 по ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

- СТЕРИЛЬНО ВНУТРИ
- АПИРОГЕННО
- НЕТОКСИЧНО
- ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Размер иглы: 0,8x38 мм

STERILE EO



Хранить изделия в упаковке предприятия-изготовителя, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80%, на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

Производитель: ООО "Спец Тех", Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. М. Гафури, д. 71, зд. 216

РУ № _____ от _____ г.

ТУ 32.50.13-003-67743762-2017

Масса брутто: ____ кг

Количество изделий: ____

 /Дата изготовления: ____

 /Партия №: ____

 /Годен до: ____



В данном документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 7

(семь) листов

Генеральный директор _____ Нигматов Л.Р.

