

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Медицинские изделия»



Галимов Д.Ф.

«05» декабря 2020 г.

Инструкция по применению

Набор гинекологический смотровой «Юнисет»
по ТУ 32.50.13-003-98349125-2018 в составе

МИ.942281.001 ИП

Версия № 3

Наименование медицинского изделия

Набор гинекологический смотровой «Юнисет» по ТУ 32.50.13-003-98349125-2018 в составе (далее по тексту – набор) исполнения согласно Таблице 1.

Область применения: медицинские, лечебно-профилактические учреждения, в том числе и амбулаторные, специализирующиеся на акушерстве и гинекологии, дерматовенерологии, урологии.

Данное изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом.

Наборы выпускаются стерильными и предназначены для одноразового использования.

Назначение

Набор гинекологический смотровой «Юнисет» по ТУ 32.50.13-003-98349125-2018 в составе предназначен для проведения профилактических осмотров и различных лечебных процедур, а именно для проведения акушерско-гинекологических осмотров и забора материала для бактериологических, цитологических и других исследований в гинекологических консультациях, гинекологических отделениях, родильных домах, кожновенерологических диспансерах и других медицинских учреждениях.

Показания для применения медицинского изделия

Осмотр слизистой влагалища и шейки матки, отбор биологического материала для проведения акушерско-гинекологических осмотров и забора материала для бактериологических, цитологических, уретральных и других исследований.

Противопоказания (меры предосторожности) при применении медицинского изделия

- Нарушение целостности стерильной упаковки.
- Истечение срока годности.
- Наличие повреждения изделий в наборе, отсутствие надежности соединения створок зеркала между собой и надежности крепления фиксатора.
- Вагинальный спазм (вагинизм).
- Гистеросальпингоскопия.

Побочные эффекты

При надлежащем использовании набора побочных эффектов не наблюдается.

Комплектность поставки

Комплект поставки набора должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	Набор гинекологический смотровой «Юнисет» в составе:	МИ.942281.001	1 набор
1.	Зеркало гинекологическое полимерное стерильное по Куско в вариантах исполнения: - тип А1 (размерами XS, S, M, L, XL) - тип А2 (размерами XS, S, M, L, XL) - тип А4 (размерами XS, S, M, L, XL) - тип В1 (размерами XS, S, M, L, XL) - тип В2 (размерами XS, S, M, L, XL) - тип В3 (размерами XS, S, M, L, XL) - тип D1 (размерами XS, S, M, L) - тип D2 (размерами S, M, L) - тип G (размерами S, M, L) - тип E1 (размерами S, M, L)	МИ.942281.001 ЗГ	1 шт.
2.	Перчатки из пленки полимерной типоразмера: XS, S, M, L, XL	МИ.942281.001 ПП	1 пара
	или Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса типоразмера: XS, S, M, L, XL	МИ.942281.001 ПД	
	или Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные одноразовые, торговой марки Bi-Safe типоразмера сверхмалые (XS), маленькие (S), средние (M), большие (L), сверхбольшие (XL)	МИ.942281.001 ПНС	
	или Перчатки латексные медицинские смотровые гладкие опудренные одноразовые, торговой марки Bi-Safe типоразмера сверхмалые (XS), маленькие (S), средние (M), большие (L), сверхбольшие (XL)	МИ.942281.001 ПЛСО	
	или Перчатки латексные медицинские смотровые текстурированные неопудренные одноразовые, торговой марки Bi-Safe типоразмера сверхмалые (XS), маленькие (S), средние (M), большие (L), сверхбольшие (XL), сверхмалые (XS) с повышенной прочностью, маленькие (S) с повышенной прочностью, средние (M) с повышенной прочностью, большие (L) с повышенной прочностью, сверхбольшие (XL) с повышенной прочностью	МИ.942281.001 ПЛСН	
	Перчатки медицинские диагностические одноразовые, размеры S, M, L, XL	МИ.942281.001 ПД	
3.	Зонд тип А1 универсальный	МИ.942281.001 ЗА1	не более 2 шт. (при необходимости)
4.	Зонд тип А2 универсальный	МИ.942281.001 ЗА2	не более 2 шт.

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
			(при необходим ости)
5.	Зонд тип А4 универсальный	МИ.942281.001 3А4	не более 2 шт. (при необходим ости)
6.	Зонд тип В1 ложка Фолькмана	МИ.942281.001 3В1	не более 2 шт. (при необходим ости)
7.	Зонд тип В2 ложка Фолькмана	МИ.942281.001 3В2	не более 2 шт. (при необходим ости)
8.	Зонд тип D1 цитошетка	МИ.942281.001 3D1	не более 2 шт. (при необходим ости)
9.	Зонд тип D2 цитошетка	МИ.942281.001 3D2	не более 2 шт. (при необходим ости)
10.	Зонд тип D3 цитошетка	МИ.942281.001 3D3	не более 2 шт. (при необходим ости)
11.	Зонд тип D4 цитошетка	МИ.942281.001 3D4	не более 2 шт. (при необходим ости)
12.	Зонд тип Е1 шпатель гинекологический двухсторонний	МИ.942281.001 3Е1	не более 2 шт. (при необходим ости)
13.	Зонд тип Е2 шпатель гинекологический двухсторонний	МИ.942281.001 3Е2	не более 2 шт. (при необходим ости)
14.	Зонд тип Е3 шпатель гинекологический двухсторонний	МИ.942281.001 3Е3	не более 2 шт. (при необходим ости)

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
15.	Зонд тип F1 комбинированный	МИ.942281.001 3F1	не более 2 шт. (при необходим ости)
16.	Зонд тип F2 комбинированный	МИ.942281.001 3F2	не более 2 шт. (при необходим ости)
17.	Зонд тип F3 комбинированный	МИ.942281.001 3F3	не более 2 шт. (при необходим ости)
18.	Зонд тип F5 комбинированный	МИ.942281.001 3F5	не более 2 шт. (при необходим ости)
19.	Зонд тип B1-1-E5-1 двухсторонний	МИ.942281.001 3B1- 1-E5-1	не более 2 шт. (при необходим ости)
20.	Зонд тип D1-E1-2 двухсторонний	МИ.942281.001 3D1- E1-2	не более 2 шт. (при необходим ости)
21.	Зонд тип D1-E3-1 двухсторонний	МИ.942281.001 3D1- E3-1	не более 2 шт. (при необходим ости)
22.	Зонд тип D1-F1 двухсторонний	МИ.942281.001 3D1- F1	не более 2 шт. (при необходим ости)
23.	Зонд тип D1-F2 двухсторонний	МИ.942281.001 3D1- F2	не более 2 шт. (при необходим ости)
24.	Зонд тип D1-F3 двухсторонний	МИ.942281.001 3D1- F3	не более 2 шт. (при необходим ости)
25.	Зонд тип D2-F1 двухсторонний	МИ.942281.001 3D2- F1	не более 2 шт.

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
			(при необходим ости)
26.	Зонд тип D2-F2 двухсторонний	МИ.942281.001 3D2- F2	не более 2 шт. (при необходим ости)
27.	Зонд тип D2-F3 двухсторонний	МИ.942281.001 3D2- F3	не более 2 шт. (при необходим ости)
28.	Зонд тип D3-F1 двухсторонний	МИ.942281.001 3D3- F1	не более 2 шт. (при необходим ости)
29.	Зонд тип D3-F2 двухсторонний	МИ.942281.001 3D3- F2	не более 2 шт. (при необходим ости)
30.	Зонд тип D3-F3 двухсторонний	МИ.942281.001 3D3- F3	не более 2 шт. (при необходим ости)
31.	Зонд тип D4-F1 двухсторонний	МИ.942281.001 3D4- F1	не более 2 шт. (при необходим ости)
32.	Зонд тип D4-F2 двухсторонний	МИ.942281.001 3D4- F2	не более 2 шт. (при необходим ости)
33.	Зонд тип D4-F3 двухсторонний	МИ.942281.001 3D4- F3	не более 2 шт. (при необходим ости)
34.	Зонд тип D1-H2-2 двухсторонний	МИ.942281.001 3D1- H2-2	не более 2 шт. (при необходим ости)
35.	Зонд тип D2-H2-2 двухсторонний	МИ.942281.001 3D2- H2-2	не более 2 шт. (при необходим ости)

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
36.	Зонд тип D3-H2-2 двухсторонний	МИ.942281.001 3D3- H2-2	не более 2 шт. (при необходим ости)
37.	Зонд тип D4-H2-2 двухсторонний	МИ.942281.001 3D4- H2-2	не более 2 шт. (при необходим ости)
38.	Зонд тип F1-H2-2 двухсторонний	МИ.942281.001 3F1- H2-2	не более 2 шт. (при необходим ости)
39.	Зонд тип F2-H2-2 двухсторонний	МИ.942281.001 3F2- H2-2	не более 2 шт. (при необходим ости)
40.	Зонд тип F3-H2-2 двухсторонний	МИ.942281.001 3F3- H2-2	не более 2 шт. (при необходим ости)
41.	Салфетка - 80*70см, спанбонд пл.20 г/м2, голубой, - 45*45см, спанбонд пл.25 г/м2, голубой, 80*70см, - спанбонд пл.25 г/м2, голубой, - 45*45см, спанбонд пл.42 г/м2, голубой, - 80*70см, спанбонд пл.42 г/м2, голубой	МИ.942281.001 С	1 шт. (при необходим ости)
42.	Пленки впитывающие, одноразовые «Clione» для взрослых и детей в вариантах исполнения: 20х20 см, 20х30 см, 20х40 см, 25х25 см, 25х30 см, 25х40 см, 30х30 см, 30х40 см, 30х50 см, 30х60 см, 30х70 см, 40х40 см, 40х50 см, 40х60 см, 40х70 см, 40х80 см, 45х45 см, 45х50 см, 45х60 см, 45х70 см, 45х80 см, 45х90 см, 50х50 см, 50х60 см, 50х65 см, 50х70 см, 50х75 см, 50х80 см, 50х85 см, 50х90 см, 50х95 см, 50х100 см, 60х60 см, 60х65 см, 60х70 см, 60х75 см, 60х80 см, 60х85 см, 60х90 см, 60х95 см, 60х100 см, 60х105 см, 60х110 см, 60х120 см, 60х130 см, 60х140 см, 60х150 см, 60х160 см, 60х170 см, 60х180 см, 60х190 см, 60х200 см, 60х300 см, 70х70 см, 70х80 см, 70х90 см, 70х100 см, 70х110 см, 70х120 см, 70х130 см, 70х140 см, 70х150 см, 70х160 см, 70х170 см, 70х180 см, 70х190 см, 70х200 см, 80х80 см, 80х90 см, 80х100 см, 80х120 см, 80х140 см, 80х160 см, 80х180 см, 80х200 см, 90х90 см, 90х100 см, 90х120 см, 90х140 см, 90х160 см, 90х170 см, 90х180 см,	МИ.942281.001 П1	1 шт. (при необходим ости)

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	90х200 см, 100х100 см, 100х120 см, 100х140 см, 100х160 см, 100х180 см, 100х200 см, 100х250 см, 140х100 см, 140х110 см, 140х120 см, 140х140 см, 140х200 см, 140х250 см, 200х200 см, 200х250 см, 250х250 см		
43.	Пеленки медицинские одноразовые Варианты исполнения: 1. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-ОБ- Э/30х50, ПеН-ОБ-Э/30х60, ПеН-ОБ-Э/30х70, ПеН-ОБ-Э/30х80, ПеН-ОБ-Э/30х90, ПеН-ОБ- Э/30х100, ПеН-ОБ-Э/40х40, ПеН-ОБ-Э/40х50, ПеН-ОБ-Э/40х60, ПеН-ОБ-Э/40х70, ПеН-ОБ- Э/40х80, ПеН-ОБ-Э/40х90, ПеН-ОБ-Э/40х100, ПеН-ОБ-Э/50х50, ПеН-ОБ-Э/50х60, ПеН-ОБ- Э/50х70, ПеН-ОБ-Э/50х80, ПеН-ОБ-Э/50х90, ПеН-ОБ-Э/50х100, ПеН-ОБ-Э/60х60, ПеН-ОБ- Э/60х70, ПеН-ОБ-Э/60х80, ПеН-ОБ-Э/60х90, ПеН-ОБ-Э/60х100, ПеН-ОБ-Э/70х70, ПеН-ОБ- Э/70х80, ПеН-ОБ-Э/70х90, ПеН-ОБ-Э/80х80, ПеН-ОБ-Э/80х90. 2. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-ОБ- С/30х50, ПеН-ОБ-С/30х60, ПеН-ОБ-С/30х70, ПеН-ОБ-С/30х80, ПеН-ОБ-С/30х90, ПеН-ОБ- С/30х100, ПеН-ОБ-С/40х40, ПеН-ОБ-С/40х50, ПеН-ОБ-С/40х60, ПеН-ОБ-С/40х70, ПеН-ОБ- С/40х80, ПеН-ОБ-С/40х90, ПеН-ОБ-С/40х100, ПеН-ОБ-С/50х50, ПеН-ОБ-С/50х60, ПеН-ОБ- С/50х70, ПеН-ОБ-С/50х80, ПеН-ОБ-С/50х90, ПеН-ОБ-С/50х100, ПеН-ОБ-С/60х60, ПеН-ОБ- С/60х70, ПеН-ОБ-С/60х80, ПеН-ОБ-С/60х90, ПеН-ОБ-С/60х100, ПеН-ОБ-С/70х70, ПеН-ОБ- С/70х80, ПеН-ОБ-С/70х90, ПеН-ОБ-С/80х80, ПеН-ОБ-С/80х90. 3. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-ОБ- К/30х50, ПеН-ОБ-К/30х60, ПеН-ОБ-К/30х70, ПеН-ОБ-К/30х80, ПеН-ОБ-К/30х90, ПеН-ОБ- К/30х100, ПеН-ОБ-К/40х40, ПеН-ОБ-К/40х50, ПеН-ОБ-К/40х60, ПеН-ОБ-К/40х70, ПеН-ОБ- К/40х80, ПеН-ОБ-К/40х90, ПеН-ОБ-К/40х100, ПеН-ОБ-К/50х50, ПеН-ОБ-К/50х60, ПеН-ОБ- К/50х70, ПеН-ОБ-К/50х80, ПеН-ОБ-К/50х90, ПеН-ОБ-К/50х100, ПеН-ОБ-К/60х60, ПеН-ОБ- К/60х70, ПеН-ОБ-К/60х80, ПеН-ОБ-К/60х90, ПеН-ОБ-К/60х100, ПеН-ОБ-К/70х70, ПеН-ОБ-	МИ.942281.001 П2	1 шт. (при необходим ости)

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	К/70х80, ПеН-ОБ-К/70х90, ПеН-ОБ-К/80х80, ПеН-ОБ-К/80х90. 4. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-ОБ-К+/30х50, ПеН-ОБ-К+/30х60, ПеН-ОБ-К+/30х70, ПеН-ОБ-К+/30х80, ПеН-ОБ-К+/30х90, ПеН-ОБ-К+/30х100, ПеН-ОБ-К+/40х40, ПеН-ОБ-К+/40х50, ПеН-ОБ-К+/40х60, ПеН-ОБ-К+/40х70, ПеН-ОБ-К+/40х80, ПеН-ОБ-К+/40х90, ПеН-ОБ-К+/40х100, ПеН-ОБ-К+/50х50, ПеН-ОБ-К+/50х60, ПеН-ОБ-К+/50х70, ПеН-ОБ-К+/50х80, ПеН-ОБ-К+/50х90, ПеН-ОБ-К+/50х100, ПеН-ОБ-К+/60х60, ПеН-ОБ-К+/60х70, ПеН-ОБ-К+/60х80, ПеН-ОБ-К+/60х90, ПеН-ОБ-К+/60х100, ПеН-ОБ-К+/70х70, ПеН-ОБ-К+/70х80, ПеН-ОБ-К+/70х90, ПеН-ОБ-К+/80х80, ПеН-ОБ-К+/80х90. 5. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-ОБ-П/30х50, ПеН-ОБ-П/30х60, ПеН-ОБ-П/30х70, ПеН-ОБ-П/30х80, ПеН-ОБ-П/30х90, ПеН-ОБ-П/30х100, ПеН-ОБ-П/40х40, ПеН-ОБ-П/40х50, ПеН-ОБ-П/40х60, ПеН-ОБ-П/40х70, ПеН-ОБ-П/40х80, ПеН-ОБ-П/40х90, ПеН-ОБ-П/40х100, ПеН-ОБ-П/50х50, ПеН-ОБ-П/50х60, ПеН-ОБ-П/50х70, ПеН-ОБ-П/50х80, ПеН-ОБ-П/50х90, ПеН-ОБ-П/50х100, ПеН-ОБ-П/60х60, ПеН-ОБ-П/60х70, ПеН-ОБ-П/60х80, ПеН-ОБ-П/60х90, ПеН-ОБ-П/60х100, ПеН-ОБ-П/70х70, ПеН-ОБ-П/70х80, ПеН-ОБ-П/70х90, ПеН-ОБ-П/80х80, ПеН-ОБ-П/80х90. 6. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-ОБ-П+/30х50, ПеН-ОБ-П+/30х60, ПеН-ОБ-П+/30х70, ПеН-ОБ-П+/30х80, ПеН-ОБ-П+/30х90, ПеН-ОБ-П+/30х100, ПеН-ОБ-П+/40х40, ПеН-ОБ-П+/40х50, ПеН-ОБ-П+/40х60, ПеН-ОБ-П+/40х70, ПеН-ОБ-П+/40х80, ПеН-ОБ-П+/40х90, ПеН-ОБ-П+/40х100, ПеН-ОБ-П+/50х50, ПеН-ОБ-П+/50х60, ПеН-ОБ-П+/50х70, ПеН-ОБ-П+/50х80, ПеН-ОБ-П+/50х90, ПеН-ОБ-П+/50х100, ПеН-ОБ-П+/60х60, ПеН-ОБ-П+/60х70, ПеН-ОБ-П+/60х80, ПеН-ОБ-П+/60х90, ПеН-ОБ-П+/60х100, ПеН-ОБ-П+/70х70, ПеН-ОБ-П+/70х80, ПеН-ОБ-П+/70х90, ПеН-ОБ-П+/80х80, ПеН-ОБ-П+/80х90. 7. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, голубого цвета, с поверхностной плотностью		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-0Г-Э/30х50, ПеН-0Г-Э/30х60, ПеН-0Г-Э/30х70, ПеН-0Г-Э/30х80, ПеН-0Г-Э/30х90, ПеН-0Г-Э/30х100, ПеН-0Г-Э/40х40, ПеН-0Г-Э/40х50, ПеН-0Г-Э/40х60, ПеН-0Г-Э/40х70, ПеН-0Г-Э/40х80, ПеН-0Г-Э/40х90, ПеН-0Г-Э/40х100, ПеН-0Г-Э/50х50, ПеН-0Г-Э/50х60, ПеН-0Г-Э/50х70, ПеН-0Г-Э/50х80, ПеН-0Г-Э/50х90, ПеН-0Г-Э/50х100, ПеН-0Г-Э/60х60, ПеН-0Г-Э/60х70, ПеН-0Г-Э/60х80, ПеН-0Г-Э/60х90, ПеН-0Г-Э/60х100, ПеН-0Г-Э/70х70, ПеН-0Г-Э/70х80, ПеН-0Г-Э/70х90, ПеН-0Г-Э/80х80, ПеН-0Г-Э/80х90. 8. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-0Г-С/30х50, ПеН-0Г-С/30х60, ПеН-0Г-С/30х70, ПеН-0Г-С/30х80, ПеН-0Г-С/30х90, ПеН-0Г-С/30х100, ПеН-0Г-С/40х40, ПеН-0Г-С/40х50, ПеН-0Г-С/40х60, ПеН-0Г-С/40х70, ПеН-0Г-С/40х80, ПеН-0Г-С/40х90, ПеН-0Г-С/40х100, ПеН-0Г-С/50х50, ПеН-0Г-С/50х60, ПеН-0Г-С/50х70, ПеН-0Г-С/50х80, ПеН-0Г-С/50х90, ПеН-0Г-С/50х100, ПеН-0Г-С/60х60, ПеН-0Г-С/60х70, ПеН-0Г-С/60х80, ПеН-0Г-С/60х90, ПеН-0Г-С/60х100, ПеН-0Г-С/70х70, ПеН-0Г-С/70х80, ПеН-0Г-С/70х90, ПеН-0Г-С/80х80, ПеН-0Г-С/80х90. 9. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-0Г-К/30х50, ПеН-0Г-К/30х60, ПеН-0Г-К/30х70, ПеН-0Г-К/30х80, ПеН-0Г-К/30х90, ПеН-0Г-К/30х100, ПеН-0Г-К/40х40, ПеН-0Г-К/40х50, ПеН-0Г-К/40х60, ПеН-0Г-К/40х70, ПеН-0Г-К/40х80, ПеН-0Г-К/40х90, ПеН-0Г-К/40х100, ПеН-0Г-К/50х50, ПеН-0Г-К/50х60, ПеН-0Г-К/50х70, ПеН-0Г-К/50х80, ПеН-0Г-К/50х90, ПеН-0Г-К/50х100, ПеН-0Г-К/60х60, ПеН-0Г-К/60х70, ПеН-0Г-К/60х80, ПеН-0Г-К/60х90, ПеН-0Г-К/60х100, ПеН-0Г-К/70х70, ПеН-0Г-К/70х80, ПеН-0Г-К/70х90, ПеН-0Г-К/80х80, ПеН-0Г-К/80х90. 10. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-0Г-К+/30х50, ПеН-0Г-К+/30х60, ПеН-0Г-К+/30х70, ПеН-0Г-К+/30х80, ПеН-0Г-К+/30х90, ПеН-0Г-К+/30х100, ПеН-0Г-К+/40х40, ПеН-0Г-К+/40х50, ПеН-0Г-К+/40х60, ПеН-0Г-К+/40х70,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ПеН-0Г-К+/40х80, ПеН-0Г-К+/40х90, ПеН-0Г-К+/40х100, ПеН-0Г-К+/50х50, ПеН-0Г-К+/50х60, ПеН-0Г-К+/50х70, ПеН-0Г-К+/50х80, ПеН-0Г-К+/50х90, ПеН-0Г-К+/50х100, ПеН-0Г-К+/60х60, ПеН-0Г-К+/60х70, ПеН-0Г-К+/60х80, ПеН-0Г-К+/60х90, ПеН-0Г-К+/60х100, ПеН-0Г-К+/70х70, ПеН-0Г-К+/70х80, ПеН-0Г-К+/70х90, ПеН-0Г-К+/80х80, ПеН-0Г-К+/80х90. 11. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-0Г-П/30х50, ПеН-0Г-П/30х60, ПеН-0Г-П/30х70, ПеН-0Г-П/30х80, ПеН-0Г-П/30х90, ПеН-0Г-П/30х100, ПеН-0Г-П/40х40, ПеН-0Г-П/40х50, ПеН-0Г-П/40х60, ПеН-0Г-П/40х70, ПеН-0Г-П/40х80, ПеН-0Г-П/40х90, ПеН-0Г-П/40х100, ПеН-0Г-П/50х50, ПеН-0Г-П/50х60, ПеН-0Г-П/50х70, ПеН-0Г-П/50х80, ПеН-0Г-П/50х90, ПеН-0Г-П/50х100, ПеН-0Г-П/60х60, ПеН-0Г-П/60х70, ПеН-0Г-П/60х80, ПеН-0Г-П/60х90, ПеН-0Г-П/60х100, ПеН-0Г-П/70х70, ПеН-0Г-П/70х80, ПеН-0Г-П/70х90, ПеН-0Г-П/80х80, ПеН-0Г-П/80х90. 12. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-0Г-П+/30х50, ПеН-0Г-П+/30х60, ПеН-0Г-П+/30х70, ПеН-0Г-П+/30х80, ПеН-0Г-П+/30х90, ПеН-0Г-П+/30х100, ПеН-0Г-П+/40х40, ПеН-0Г-П+/40х50, ПеН-0Г-П+/40х60, ПеН-0Г-П+/40х70, ПеН-0Г-П+/40х80, ПеН-0Г-П+/40х90, ПеН-0Г-П+/40х100, ПеН-0Г-П+/50х50, ПеН-0Г-П+/50х60, ПеН-0Г-П+/50х70, ПеН-0Г-П+/50х80, ПеН-0Г-П+/50х90, ПеН-0Г-П+/50х100, ПеН-0Г-П+/60х60, ПеН-0Г-П+/60х70, ПеН-0Г-П+/60х80, ПеН-0Г-П+/60х90, ПеН-0Г-П+/60х100, ПеН-0Г-П+/70х70, ПеН-0Г-П+/70х80, ПеН-0Г-П+/70х90, ПеН-0Г-П+/80х80, ПеН-0Г-П+/80х90. 13. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-0Ж-Э/30х50, ПеН-0Ж-Э/30х60, ПеН-0Ж-Э/30х70, ПеН-0Ж-Э/30х80, ПеН-0Ж-Э/30х90, ПеН-0Ж-Э/30х100, ПеН-0Ж-Э/40х40, ПеН-0Ж-Э/40х50, ПеН-0Ж-Э/40х60, ПеН-0Ж-Э/40х70, ПеН-0Ж-Э/40х80, ПеН-0Ж-Э/40х90, ПеН-0Ж-Э/40х100, ПеН-0Ж-Э/50х50, ПеН-0Ж-Э/50х60, ПеН-0Ж-Э/50х70, ПеН-0Ж-Э/50х80, ПеН-0Ж-Э/50х90, ПеН-0Ж-Э/50х100, ПеН-0Ж-Э/60х60, ПеН-0Ж-Э/60х70, ПеН-0Ж-Э/60х80, ПеН-0Ж-Э/60х90,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ПеН-ОЖ-Э/60х100, ПеН-ОЖ-Э/70х70, ПеН-ОЖ-Э/70х80, ПеН-ОЖ-Э/70х90, ПеН-ОЖ-Э/80х80, ПеН-ОЖ-Э/80х90. 14. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-ОЖ-С/30х50, ПеН-ОЖ-С/30х60, ПеН-ОЖ-С/30х70, ПеН-ОЖ-С/30х80, ПеН-ОЖ-С/30х90, ПеН-ОЖ-С/30х100, ПеН-ОЖ-С/40х40, ПеН-ОЖ-С/40х50, ПеН-ОЖ-С/40х60, ПеН-ОЖ-С/40х70, ПеН-ОЖ-С/40х80, ПеН-ОЖ-С/40х90, ПеН-ОЖ-С/40х100, ПеН-ОЖ-С/50х50, ПеН-ОЖ-С/50х60, ПеН-ОЖ-С/50х70, ПеН-ОЖ-С/50х80, ПеН-ОЖ-С/50х90, ПеН-ОЖ-С/50х100, ПеН-ОЖ-С/60х60, ПеН-ОЖ-С/60х70, ПеН-ОЖ-С/60х80, ПеН-ОЖ-С/60х90, ПеН-ОЖ-С/60х100, ПеН-ОЖ-С/70х70, ПеН-ОЖ-С/70х80, ПеН-ОЖ-С/70х90, ПеН-ОЖ-С/80х80, ПеН-ОЖ-С/80х90. 15. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-ОЖ-К/30х50, ПеН-ОЖ-К/30х60, ПеН-ОЖ-К/30х70, ПеН-ОЖ-К/30х80, ПеН-ОЖ-К/30х90, ПеН-ОЖ-К/30х100, ПеН-ОЖ-К/40х40, ПеН-ОЖ-К/40х50, ПеН-ОЖ-К/40х60, ПеН-ОЖ-К/40х70, ПеН-ОЖ-К/40х80, ПеН-ОЖ-К/40х90, ПеН-ОЖ-К/40х100, ПеН-ОЖ-К/50х50, ПеН-ОЖ-К/50х60, ПеН-ОЖ-К/50х70, ПеН-ОЖ-К/50х80, ПеН-ОЖ-К/50х90, ПеН-ОЖ-К/50х100, ПеН-ОЖ-К/60х60, ПеН-ОЖ-К/60х70, ПеН-ОЖ-К/60х80, ПеН-ОЖ-К/60х90, ПеН-ОЖ-К/60х100, ПеН-ОЖ-К/70х70, ПеН-ОЖ-К/70х80, ПеН-ОЖ-К/70х90, ПеН-ОЖ-К/80х80, ПеН-ОЖ-К/80х90. 16. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-ОЖ-К+/30х50, ПеН-ОЖ-К+/30х60, ПеН-ОЖ-К+/30х70, ПеН-ОЖ-К+/30х80, ПеН-ОЖ-К+/30х90, ПеН-ОЖ-К+/30х100, ПеН-ОЖ-К+/40х40, ПеН-ОЖ-К+/40х50, ПеН-ОЖ-К+/40х60, ПеН-ОЖ-К+/40х70, ПеН-ОЖ-К+/40х80, ПеН-ОЖ-К+/40х90, ПеН-ОЖ-К+/40х100, ПеН-ОЖ-К+/50х50, ПеН-ОЖ-К+/50х60, ПеН-ОЖ-К+/50х70, ПеН-ОЖ-К+/50х80, ПеН-ОЖ-К+/50х90, ПеН-ОЖ-К+/50х100, ПеН-ОЖ-К+/60х60, ПеН-ОЖ-К+/60х70, ПеН-ОЖ-К+/60х80, ПеН-ОЖ-К+/60х90, ПеН-ОЖ-К+/60х100, ПеН-ОЖ-К+/70х70, ПеН-ОЖ-К+/70х80, ПеН-ОЖ-К+/70х90, ПеН-ОЖ-К+/80х80, ПеН-ОЖ-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	К+/80х90. 17. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-0Ж-П/30х50, ПеН-0Ж-П/30х60, ПеН-0Ж-П/30х70, ПеН-0Ж-П/30х80, ПеН-0Ж-П/30х90, ПеН-0Ж-П/30х100, ПеН-0Ж-П/40х40, ПеН-0Ж-П/40х50, ПеН-0Ж-П/40х60, ПеН-0Ж-П/40х70, ПеН-0Ж-П/40х80, ПеН-0Ж-П/40х90, ПеН-0Ж-П/40х100, ПеН-0Ж-П/50х50, ПеН-0Ж-П/50х60, ПеН-0Ж-П/50х70, ПеН-0Ж-П/50х80, ПеН-0Ж-П/50х90, ПеН-0Ж-П/50х100, ПеН-0Ж-П/60х60, ПеН-0Ж-П/60х70, ПеН-0Ж-П/60х80, ПеН-0Ж-П/60х90, ПеН-0Ж-П/60х100, ПеН-0Ж-П/70х70, ПеН-0Ж-П/70х80, ПеН-0Ж-П/70х90, ПеН-0Ж-П/80х80, ПеН-0Ж-П/80х90. 18. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-0Ж-П+/30х50, ПеН-0Ж-П+/30х60, ПеН-0Ж-П+/30х70, ПеН-0Ж-П+/30х80, ПеН-0Ж-П+/30х90, ПеН-0Ж-П+/30х100, ПеН-0Ж-П+/40х40, ПеН-0Ж-П+/40х50, ПеН-0Ж-П+/40х60, ПеН-0Ж-П+/40х70, ПеН-0Ж-П+/40х80, ПеН-0Ж-П+/40х90, ПеН-0Ж-П+/40х100, ПеН-0Ж-П+/50х50, ПеН-0Ж-П+/50х60, ПеН-0Ж-П+/50х70, ПеН-0Ж-П+/50х80, ПеН-0Ж-П+/50х90, ПеН-0Ж-П+/50х100, ПеН-0Ж-П+/60х60, ПеН-0Ж-П+/60х70, ПеН-0Ж-П+/60х80, ПеН-0Ж-П+/60х90, ПеН-0Ж-П+/60х100, ПеН-0Ж-П+/70х70, ПеН-0Ж-П+/70х80, ПеН-0Ж-П+/70х90, ПеН-0Ж-П+/80х80, ПеН-0Ж-П+/80х90. 19. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-0Р-Э/30х50, ПеН-0Р-Э/30х60, ПеН-0Р-Э/30х70, ПеН-0Р-Э/30х80, ПеН-0Р-Э/30х90, ПеН-0Р-Э/30х100, ПеН-0Р-Э/40х40, ПеН-0Р-Э/40х50, ПеН-0Р-Э/40х60, ПеН-0Р-Э/40х70, ПеН-0Р-Э/40х80, ПеН-0Р-Э/40х90, ПеН-0Р-Э/40х100, ПеН-0Р-Э/50х50, ПеН-0Р-Э/50х60, ПеН-0Р-Э/50х70, ПеН-0Р-Э/50х80, ПеН-0Р-Э/50х90, ПеН-0Р-Э/50х100, ПеН-0Р-Э/60х60, ПеН-0Р-Э/60х70, ПеН-0Р-Э/60х80, ПеН-0Р-Э/60х90, ПеН-0Р-Э/60х100, ПеН-0Р-Э/70х70, ПеН-0Р-Э/70х80, ПеН-0Р-Э/70х90, ПеН-0Р-Э/80х80, ПеН-0Р-Э/80х90. 20. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-ОР-С/30х50, ПеН-ОР-С/30х60, ПеН-ОР-С/30х70, ПеН-ОР-С/30х80, ПеН-ОР-С/30х90, ПеН-ОР-С/30х100, ПеН-ОР-С/40х40, ПеН-ОР-С/40х50, ПеН-ОР-С/40х60, ПеН-ОР-С/40х70, ПеН-ОР-С/40х80, ПеН-ОР-С/40х90, ПеН-ОР-С/40х100, ПеН-ОР-С/50х50, ПеН-ОР-С/50х60, ПеН-ОР-С/50х70, ПеН-ОР-С/50х80, ПеН-ОР-С/50х90, ПеН-ОР-С/50х100, ПеН-ОР-С/60х60, ПеН-ОР-С/60х70, ПеН-ОР-С/60х80, ПеН-ОР-С/60х90, ПеН-ОР-С/60х100, ПеН-ОР-С/70х70, ПеН-ОР-С/70х80, ПеН-ОР-С/70х90, ПеН-ОР-С/80х80, ПеН-ОР-С/80х90. 21. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-ОР-К/30х50, ПеН-ОР-К/30х60, ПеН-ОР-К/30х70, ПеН-ОР-К/30х80, ПеН-ОР-К/30х90, ПеН-ОР-К/30х100, ПеН-ОР-К/40х40, ПеН-ОР-К/40х50, ПеН-ОР-К/40х60, ПеН-ОР-К/40х70, ПеН-ОР-К/40х80, ПеН-ОР-К/40х90, ПеН-ОР-К/40х100, ПеН-ОР-К/50х50, ПеН-ОР-К/50х60, ПеН-ОР-К/50х70, ПеН-ОР-К/50х80, ПеН-ОР-К/50х90, ПеН-ОР-К/50х100, ПеН-ОР-К/60х60, ПеН-ОР-К/60х70, ПеН-ОР-К/60х80, ПеН-ОР-К/60х90, ПеН-ОР-К/60х100, ПеН-ОР-К/70х70, ПеН-ОР-К/70х80, ПеН-ОР-К/70х90, ПеН-ОР-К/80х80, ПеН-ОР-К/80х90. 22. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-ОР-К+/30х50, ПеН-ОР-К+/30х60, ПеН-ОР-К+/30х70, ПеН-ОР-К+/30х80, ПеН-ОР-К+/30х90, ПеН-ОР-К+/30х100, ПеН-ОР-К+/40х40, ПеН-ОР-К+/40х50, ПеН-ОР-К+/40х60, ПеН-ОР-К+/40х70, ПеН-ОР-К+/40х80, ПеН-ОР-К+/40х90, ПеН-ОР-К+/40х100, ПеН-ОР-К+/50х50, ПеН-ОР-К+/50х60, ПеН-ОР-К+/50х70, ПеН-ОР-К+/50х80, ПеН-ОР-К+/50х90, ПеН-ОР-К+/50х100, ПеН-ОР-К+/60х60, ПеН-ОР-К+/60х70, ПеН-ОР-К+/60х80, ПеН-ОР-К+/60х90, ПеН-ОР-К+/60х100, ПеН-ОР-К+/70х70, ПеН-ОР-К+/70х80, ПеН-ОР-К+/70х90, ПеН-ОР-К+/80х80, ПеН-ОР-К+/80х90. 23. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-ОР-П/30х50, ПеН-ОР-П/30х60, ПеН-ОР-П/30х70, ПеН-ОР-П/30х80, ПеН-ОР-П/30х90, ПеН-ОР-П/30х100, ПеН-ОР-П/40х40, ПеН-ОР-П/40х50,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ПеН-ОР-П/40х60, ПеН-ОР-П/40х70, ПеН-ОР-П/40х80, ПеН-ОР-П/40х90, ПеН-ОР-П/40х100, ПеН-ОР-П/50х50, ПеН-ОР-П/50х60, ПеН-ОР-П/50х70, ПеН-ОР-П/50х80, ПеН-ОР-П/50х90, ПеН-ОР-П/50х100, ПеН-ОР-П/60х60, ПеН-ОР-П/60х70, ПеН-ОР-П/60х80, ПеН-ОР-П/60х90, ПеН-ОР-П/60х100, ПеН-ОР-П/70х70, ПеН-ОР-П/70х80, ПеН-ОР-П/70х90, ПеН-ОР-П/80х80, ПеН-ОР-П/80х90. 24. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-ОР-П+/30х50, ПеН-ОР-П+/30х60, ПеН-ОР-П+/30х70, ПеН-ОР-П+/30х80, ПеН-ОР-П+/30х90, ПеН-ОР-П+/30х100, ПеН-ОР-П+/40х40, ПеН-ОР-П+/40х50, ПеН-ОР-П+/40х60, ПеН-ОР-П+/40х70, ПеН-ОР-П+/40х80, ПеН-ОР-П+/40х90, ПеН-ОР-П+/40х100, ПеН-ОР-П+/50х50, ПеН-ОР-П+/50х60, ПеН-ОР-П+/50х70, ПеН-ОР-П+/50х80, ПеН-ОР-П+/50х90, ПеН-ОР-П+/50х100, ПеН-ОР-П+/60х60, ПеН-ОР-П+/60х70, ПеН-ОР-П+/60х80, ПеН-ОР-П+/60х90, ПеН-ОР-П+/60х100, ПеН-ОР-П+/70х70, ПеН-ОР-П+/70х80, ПеН-ОР-П+/70х90, ПеН-ОР-П+/80х80, ПеН-ОР-П+/80х90. 25. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-03-Э/30х50, ПеН-03-Э/30х60, ПеН-03-Э/30х70, ПеН-03-Э/30х80, ПеН-03-Э/30х90, ПеН-03-Э/30х100, ПеН-03-Э/40х40, ПеН-03-Э/40х50, ПеН-03-Э/40х60, ПеН-03-Э/40х70, ПеН-03-Э/40х80, ПеН-03-Э/40х90, ПеН-03-Э/40х100, ПеН-03-Э/50х50, ПеН-03-Э/50х60, ПеН-03-Э/50х70, ПеН-03-Э/50х80, ПеН-03-Э/50х90, ПеН-03-Э/50х100, ПеН-03-Э/60х60, ПеН-03-Э/60х70, ПеН-03-Э/60х80, ПеН-03-Э/60х90, ПеН-03-Э/60х100, ПеН-03-Э/70х70, ПеН-03-Э/70х80, ПеН-03-Э/70х90, ПеН-03-Э/80х80, ПеН-03-Э/80х90. 26. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-03-С/30х50, ПеН-03-С/30х60, ПеН-03-С/30х70, ПеН-03-С/30х80, ПеН-03-С/30х90, ПеН-03-С/30х100, ПеН-03-С/40х40, ПеН-03-С/40х50, ПеН-03-С/40х60, ПеН-03-С/40х70, ПеН-03-С/40х80, ПеН-03-С/40х90, ПеН-03-С/40х100, ПеН-03-С/50х50, ПеН-03-С/50х60, ПеН-03-С/50х70, ПеН-03-С/50х80, ПеН-03-С/50х90, ПеН-03-С/50х100, ПеН-03-С/60х60, ПеН-03-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	С/60х70, ПеН-03-С/60х80, ПеН-03-С/60х90, ПеН-03-С/60х100, ПеН-03-С/70х70, ПеН-03-С/70х80, ПеН-03-С/70х90, ПеН-03-С/80х80, ПеН-03-С/80х90. 27. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-03-К/30х50, ПеН-03-К/30х60, ПеН-03-К/30х70, ПеН-03-К/30х80, ПеН-03-К/30х90, ПеН-03-К/30х100, ПеН-03-К/40х40, ПеН-03-К/40х50, ПеН-03-К/40х60, ПеН-03-К/40х70, ПеН-03-К/40х80, ПеН-03-К/40х90, ПеН-03-К/40х100, ПеН-03-К/50х50, ПеН-03-К/50х60, ПеН-03-К/50х70, ПеН-03-К/50х80, ПеН-03-К/50х90, ПеН-03-К/50х100, ПеН-03-К/60х60, ПеН-03-К/60х70, ПеН-03-К/60х80, ПеН-03-К/60х90, ПеН-03-К/60х100, ПеН-03-К/70х70, ПеН-03-К/70х80, ПеН-03-К/70х90, ПеН-03-К/80х80, ПеН-03-К/80х90. 28. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-03-К+/30х50, ПеН-03-К+/30х60, ПеН-03-К+/30х70, ПеН-03-К+/30х80, ПеН-03-К+/30х90, ПеН-03-К+/30х100, ПеН-03-К+/40х40, ПеН-03-К+/40х50, ПеН-03-К+/40х60, ПеН-03-К+/40х70, ПеН-03-К+/40х80, ПеН-03-К+/40х90, ПеН-03-К+/40х100, ПеН-03-К+/50х50, ПеН-03-К+/50х60, ПеН-03-К+/50х70, ПеН-03-К+/50х80, ПеН-03-К+/50х90, ПеН-03-К+/50х100, ПеН-03-К+/60х60, ПеН-03-К+/60х70, ПеН-03-К+/60х80, ПеН-03-К+/60х90, ПеН-03-К+/60х100, ПеН-03-К+/70х70, ПеН-03-К+/70х80, ПеН-03-К+/70х90, ПеН-03-К+/80х80, ПеН-03-К+/80х90. 29. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-03-П/30х50, ПеН-03-П/30х60, ПеН-03-П/30х70, ПеН-03-П/30х80, ПеН-03-П/30х90, ПеН-03-П/30х100, ПеН-03-П/40х40, ПеН-03-П/40х50, ПеН-03-П/40х60, ПеН-03-П/40х70, ПеН-03-П/40х80, ПеН-03-П/40х90, ПеН-03-П/40х100, ПеН-03-П/50х50, ПеН-03-П/50х60, ПеН-03-П/50х70, ПеН-03-П/50х80, ПеН-03-П/50х90, ПеН-03-П/50х100, ПеН-03-П/60х60, ПеН-03-П/60х70, ПеН-03-П/60х80, ПеН-03-П/60х90, ПеН-03-П/60х100, ПеН-03-П/70х70, ПеН-03-П/70х80, ПеН-03-П/70х90, ПеН-03-П/80х80, ПеН-03-П/80х90.		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	30. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-03-П+/30х50, ПеН-03-П+/30х60, ПеН-03-П+/30х70, ПеН-03-П+/30х80, ПеН-03-П+/30х90, ПеН-03-П+/30х100, ПеН-03-П+/40х40, ПеН-03-П+/40х50, ПеН-03-П+/40х60, ПеН-03-П+/40х70, ПеН-03-П+/40х80, ПеН-03-П+/40х90, ПеН-03-П+/40х100, ПеН-03-П+/50х50, ПеН-03-П+/50х60, ПеН-03-П+/50х70, ПеН-03-П+/50х80, ПеН-03-П+/50х90, ПеН-03-П+/50х100, ПеН-03-П+/60х60, ПеН-03-П+/60х70, ПеН-03-П+/60х80, ПеН-03-П+/60х90, ПеН-03-П+/60х100, ПеН-03-П+/70х70, ПеН-03-П+/70х80, ПеН-03-П+/70х90, ПеН-03-П+/80х80, ПеН-03-П+/80х90. 31. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-0Ф-Э/30х50, ПеН-0Ф-Э/30х60, ПеН-0Ф-Э/30х70, ПеН-0Ф-Э/30х80, ПеН-0Ф-Э/30х90, ПеН-0Ф-Э/30х100, ПеН-0Ф-Э/40х40, ПеН-0Ф-Э/40х50, ПеН-0Ф-Э/40х60, ПеН-0Ф-Э/40х70, ПеН-0Ф-Э/40х80, ПеН-0Ф-Э/40х90, ПеН-0Ф-Э/40х100, ПеН-0Ф-Э/50х50, ПеН-0Ф-Э/50х60, ПеН-0Ф-Э/50х70, ПеН-0Ф-Э/50х80, ПеН-0Ф-Э/50х90, ПеН-0Ф-Э/50х100, ПеН-0Ф-Э/60х60, ПеН-0Ф-Э/60х70, ПеН-0Ф-Э/60х80, ПеН-0Ф-Э/60х90, ПеН-0Ф-Э/60х100, ПеН-0Ф-Э/70х70, ПеН-0Ф-Э/70х80, ПеН-0Ф-Э/70х90, ПеН-0Ф-Э/80х80, ПеН-0Ф-Э/80х90. 32. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-0Ф-С/30х50, ПеН-0Ф-С/30х60, ПеН-0Ф-С/30х70, ПеН-0Ф-С/30х80, ПеН-0Ф-С/30х90, ПеН-0Ф-С/30х100, ПеН-0Ф-С/40х40, ПеН-0Ф-С/40х50, ПеН-0Ф-С/40х60, ПеН-0Ф-С/40х70, ПеН-0Ф-С/40х80, ПеН-0Ф-С/40х90, ПеН-0Ф-С/40х100, ПеН-0Ф-С/50х50, ПеН-0Ф-С/50х60, ПеН-0Ф-С/50х70, ПеН-0Ф-С/50х80, ПеН-0Ф-С/50х90, ПеН-0Ф-С/50х100, ПеН-0Ф-С/60х60, ПеН-0Ф-С/60х70, ПеН-0Ф-С/60х80, ПеН-0Ф-С/60х90, ПеН-0Ф-С/60х100, ПеН-0Ф-С/70х70, ПеН-0Ф-С/70х80, ПеН-0Ф-С/70х90, ПеН-0Ф-С/80х80, ПеН-0Ф-С/80х90. 33. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-0Ф-К/30х50, ПеН-0Ф-К/30х60, ПеН-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	0Ф-К/30х70, ПеН-0Ф-К/30х80, ПеН-0Ф-К/30х90, ПеН-0Ф-К/30х100, ПеН-0Ф-К/40х40, ПеН-0Ф-К/40х50, ПеН-0Ф-К/40х60, ПеН-0Ф-К/40х70, ПеН-0Ф-К/40х80, ПеН-0Ф-К/40х90, ПеН-0Ф-К/40х100, ПеН-0Ф-К/50х50, ПеН-0Ф-К/50х60, ПеН-0Ф-К/50х70, ПеН-0Ф-К/50х80, ПеН-0Ф-К/50х90, ПеН-0Ф-К/50х100, ПеН-0Ф-К/60х60, ПеН-0Ф-К/60х70, ПеН-0Ф-К/60х80, ПеН-0Ф-К/60х90, ПеН-0Ф-К/60х100, ПеН-0Ф-К/70х70, ПеН-0Ф-К/70х80, ПеН-0Ф-К/70х90, ПеН-0Ф-К/80х80, ПеН-0Ф-К/80х90. 34. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-0Ф-К+/30х50, ПеН-0Ф-К+/30х60, ПеН-0Ф-К+/30х70, ПеН-0Ф-К+/30х80, ПеН-0Ф-К+/30х90, ПеН-0Ф-К+/30х100, ПеН-0Ф-К+/40х40, ПеН-0Ф-К+/40х50, ПеН-0Ф-К+/40х60, ПеН-0Ф-К+/40х70, ПеН-0Ф-К+/40х80, ПеН-0Ф-К+/40х90, ПеН-0Ф-К+/40х100, ПеН-0Ф-К+/50х50, ПеН-0Ф-К+/50х60, ПеН-0Ф-К+/50х70, ПеН-0Ф-К+/50х80, ПеН-0Ф-К+/50х90, ПеН-0Ф-К+/50х100, ПеН-0Ф-К+/60х60, ПеН-0Ф-К+/60х70, ПеН-0Ф-К+/60х80, ПеН-0Ф-К+/60х90, ПеН-0Ф-К+/60х100, ПеН-0Ф-К+/70х70, ПеН-0Ф-К+/70х80, ПеН-0Ф-К+/70х90, ПеН-0Ф-К+/80х80, ПеН-0Ф-К+/80х90. 35. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-0Ф-П/30х50, ПеН-0Ф-П/30х60, ПеН-0Ф-П/30х70, ПеН-0Ф-П/30х80, ПеН-0Ф-П/30х90, ПеН-0Ф-П/30х100, ПеН-0Ф-П/40х40, ПеН-0Ф-П/40х50, ПеН-0Ф-П/40х60, ПеН-0Ф-П/40х70, ПеН-0Ф-П/40х80, ПеН-0Ф-П/40х90, ПеН-0Ф-П/40х100, ПеН-0Ф-П/50х50, ПеН-0Ф-П/50х60, ПеН-0Ф-П/50х70, ПеН-0Ф-П/50х80, ПеН-0Ф-П/50х90, ПеН-0Ф-П/50х100, ПеН-0Ф-П/60х60, ПеН-0Ф-П/60х70, ПеН-0Ф-П/60х80, ПеН-0Ф-П/60х90, ПеН-0Ф-П/60х100, ПеН-0Ф-П/70х70, ПеН-0Ф-П/70х80, ПеН-0Ф-П/70х90, ПеН-0Ф-П/80х80, ПеН-0Ф-П/80х90. 36. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-0Ф-П+/30х50, ПеН-0Ф-П+/30х60, ПеН-0Ф-П+/30х70, ПеН-0Ф-П+/30х80, ПеН-0Ф-П+/30х90, ПеН-0Ф-П+/30х100, ПеН-0Ф-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	П+/40х40, ПеН-0Ф-П+/40х50, ПеН-0Ф-П+/40х60, ПеН-0Ф-П+/40х70, ПеН-0Ф-П+/40х80, ПеН-0Ф-П+/40х90, ПеН-0Ф-П+/40х100, ПеН-0Ф-П+/50х50, ПеН-0Ф-П+/50х60, ПеН-0Ф-П+/50х70, ПеН-0Ф-П+/50х80, ПеН-0Ф-П+/50х90, ПеН-0Ф-П+/50х100, ПеН-0Ф-П+/60х60, ПеН-0Ф-П+/60х70, ПеН-0Ф-П+/60х80, ПеН-0Ф-П+/60х90, ПеН-0Ф-П+/60х100, ПеН-0Ф-П+/70х70, ПеН-0Ф-П+/70х80, ПеН-0Ф-П+/70х90, ПеН-0Ф-П+/80х80, ПеН-0Ф-П+/80х90. 37. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-1Б-Э/30х50, ПеН-1Б-Э/30х60, ПеН-1Б-Э/30х70, ПеН-1Б-Э/30х80, ПеН-1Б-Э/30х90, ПеН-1Б-Э/30х100, ПеН-1Б-Э/40х40, ПеН-1Б-Э/40х50, ПеН-1Б-Э/40х60, ПеН-1Б-Э/40х70, ПеН-1Б-Э/40х80, ПеН-1Б-Э/40х90, ПеН-1Б-Э/40х100, ПеН-1Б-Э/50х50, ПеН-1Б-Э/50х60, ПеН-1Б-Э/50х70, ПеН-1Б-Э/50х80, ПеН-1Б-Э/50х90, ПеН-1Б-Э/50х100, ПеН-1Б-Э/60х60, ПеН-1Б-Э/60х70, ПеН-1Б-Э/60х80, ПеН-1Б-Э/60х90, ПеН-1Б-Э/60х100, ПеН-1Б-Э/70х70, ПеН-1Б-Э/70х80, ПеН-1Б-Э/70х90, ПеН-1Б-Э/80х80, ПеН-1Б-Э/80х90. 38. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-1Б-С/30х50, ПеН-1Б-С/30х60, ПеН-1Б-С/30х70, ПеН-1Б-С/30х80, ПеН-1Б-С/30х90, ПеН-1Б-С/30х100, ПеН-1Б-С/40х40, ПеН-1Б-С/40х50, ПеН-1Б-С/40х60, ПеН-1Б-С/40х70, ПеН-1Б-С/40х80, ПеН-1Б-С/40х90, ПеН-1Б-С/40х100, ПеН-1Б-С/50х50, ПеН-1Б-С/50х60, ПеН-1Б-С/50х70, ПеН-1Б-С/50х80, ПеН-1Б-С/50х90, ПеН-1Б-С/50х100, ПеН-1Б-С/60х60, ПеН-1Б-С/60х70, ПеН-1Б-С/60х80, ПеН-1Б-С/60х90, ПеН-1Б-С/60х100, ПеН-1Б-С/70х70, ПеН-1Б-С/70х80, ПеН-1Б-С/70х90, ПеН-1Б-С/80х80, ПеН-1Б-С/80х90. 39. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-1Б-К/30х50, ПеН-1Б-К/30х60, ПеН-1Б-К/30х70, ПеН-1Б-К/30х80, ПеН-1Б-К/30х90, ПеН-1Б-К/30х100, ПеН-1Б-К/40х40, ПеН-1Б-К/40х50, ПеН-1Б-К/40х60, ПеН-1Б-К/40х70, ПеН-1Б-К/40х80, ПеН-1Б-К/40х90, ПеН-1Б-К/40х100, ПеН-1Б-К/50х50, ПеН-1Б-К/50х60,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ПеН-1Б-К/50х70, ПеН-1Б-К/50х80, ПеН-1Б-К/50х90, ПеН-1Б-К/50х100, ПеН-1Б-К/60х60, ПеН-1Б-К/60х70, ПеН-1Б-К/60х80, ПеН-1Б-К/60х90, ПеН-1Б-К/60х100, ПеН-1Б-К/70х70, ПеН-1Б-К/70х80, ПеН-1Б-К/70х90, ПеН-1Б-К/80х80, ПеН-1Б-К/80х90. 40. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-1Б-К+/30х50, ПеН-1Б-К+/30х60, ПеН-1Б-К+/30х70, ПеН-1Б-К+/30х80, ПеН-1Б-К+/30х90, ПеН-1Б-К+/30х100, ПеН-1Б-К+/40х40, ПеН-1Б-К+/40х50, ПеН-1Б-К+/40х60, ПеН-1Б-К+/40х70, ПеН-1Б-К+/40х80, ПеН-1Б-К+/40х90, ПеН-1Б-К+/40х100, ПеН-1Б-К+/50х50, ПеН-1Б-К+/50х60, ПеН-1Б-К+/50х70, ПеН-1Б-К+/50х80, ПеН-1Б-К+/50х90, ПеН-1Б-К+/50х100, ПеН-1Б-К+/60х60, ПеН-1Б-К+/60х70, ПеН-1Б-К+/60х80, ПеН-1Б-К+/60х90, ПеН-1Б-К+/60х100, ПеН-1Б-К+/70х70, ПеН-1Б-К+/70х80, ПеН-1Б-К+/70х90, ПеН-1Б-К+/80х80, ПеН-1Б-К+/80х90. 41. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-1Б-П/30х50, ПеН-1Б-П/30х60, ПеН-1Б-П/30х70, ПеН-1Б-П/30х80, ПеН-1Б-П/30х90, ПеН-1Б-П/30х100, ПеН-1Б-П/40х40, ПеН-1Б-П/40х50, ПеН-1Б-П/40х60, ПеН-1Б-П/40х70, ПеН-1Б-П/40х80, ПеН-1Б-П/40х90, ПеН-1Б-П/40х100, ПеН-1Б-П/50х50, ПеН-1Б-П/50х60, ПеН-1Б-П/50х70, ПеН-1Б-П/50х80, ПеН-1Б-П/50х90, ПеН-1Б-П/50х100, ПеН-1Б-П/60х60, ПеН-1Б-П/60х70, ПеН-1Б-П/60х80, ПеН-1Б-П/60х90, ПеН-1Б-П/60х100, ПеН-1Б-П/70х70, ПеН-1Б-П/70х80, ПеН-1Б-П/70х90, ПеН-1Б-П/80х80, ПеН-1Б-П/80х90. 42. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-1Б-П+/30х50, ПеН-1Б-П+/30х60, ПеН-1Б-П+/30х70, ПеН-1Б-П+/30х80, ПеН-1Б-П+/30х90, ПеН-1Б-П+/30х100, ПеН-1Б-П+/40х40, ПеН-1Б-П+/40х50, ПеН-1Б-П+/40х60, ПеН-1Б-П+/40х70, ПеН-1Б-П+/40х80, ПеН-1Б-П+/40х90, ПеН-1Б-П+/40х100, ПеН-1Б-П+/50х50, ПеН-1Б-П+/50х60, ПеН-1Б-П+/50х70, ПеН-1Б-П+/50х80, ПеН-1Б-П+/50х90, ПеН-1Б-П+/50х100, ПеН-1Б-П+/60х60, ПеН-1Б-П+/60х70, ПеН-1Б-П+/60х80, ПеН-1Б-П+/60х90,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ПеН-1Б-П+/60х100, ПеН-1Б-П+/70х70, ПеН-1Б-П+/70х80, ПеН-1Б-П+/70х90, ПеН-1Б-П+/80х80, ПеН-1Б-П+/80х90. 43. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-1Г-Э/30х50, ПеН-1Г-Э/30х60, ПеН-1Г-Э/30х70, ПеН-1Г-Э/30х80, ПеН-1Г-Э/30х90, ПеН-1Г-Э/30х100, ПеН-1Г-Э/40х40, ПеН-1Г-Э/40х50, ПеН-1Г-Э/40х60, ПеН-1Г-Э/40х70, ПеН-1Г-Э/40х80, ПеН-1Г-Э/40х90, ПеН-1Г-Э/40х100, ПеН-1Г-Э/50х50, ПеН-1Г-Э/50х60, ПеН-1Г-Э/50х70, ПеН-1Г-Э/50х80, ПеН-1Г-Э/50х90, ПеН-1Г-Э/50х100, ПеН-1Г-Э/60х60, ПеН-1Г-Э/60х70, ПеН-1Г-Э/60х80, ПеН-1Г-Э/60х90, ПеН-1Г-Э/60х100, ПеН-1Г-Э/70х70, ПеН-1Г-Э/70х80, ПеН-1Г-Э/70х90, ПеН-1Г-Э/80х80, ПеН-1Г-Э/80х90. 44. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-1Г-С/30х50, ПеН-1Г-С/30х60, ПеН-1Г-С/30х70, ПеН-1Г-С/30х80, ПеН-1Г-С/30х90, ПеН-1Г-С/30х100, ПеН-1Г-С/40х40, ПеН-1Г-С/40х50, ПеН-1Г-С/40х60, ПеН-1Г-С/40х70, ПеН-1Г-С/40х80, ПеН-1Г-С/40х90, ПеН-1Г-С/40х100, ПеН-1Г-С/50х50, ПеН-1Г-С/50х60, ПеН-1Г-С/50х70, ПеН-1Г-С/50х80, ПеН-1Г-С/50х90, ПеН-1Г-С/50х100, ПеН-1Г-С/60х60, ПеН-1Г-С/60х70, ПеН-1Г-С/60х80, ПеН-1Г-С/60х90, ПеН-1Г-С/60х100, ПеН-1Г-С/70х70, ПеН-1Г-С/70х80, ПеН-1Г-С/70х90, ПеН-1Г-С/80х80, ПеН-1Г-С/80х90. 45. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-1Г-К/30х50, ПеН-1Г-К/30х60, ПеН-1Г-К/30х70, ПеН-1Г-К/30х80, ПеН-1Г-К/30х90, ПеН-1Г-К/30х100, ПеН-1Г-К/40х40, ПеН-1Г-К/40х50, ПеН-1Г-К/40х60, ПеН-1Г-К/40х70, ПеН-1Г-К/40х80, ПеН-1Г-К/40х90, ПеН-1Г-К/40х100, ПеН-1Г-К/50х50, ПеН-1Г-К/50х60, ПеН-1Г-К/50х70, ПеН-1Г-К/50х80, ПеН-1Г-К/50х90, ПеН-1Г-К/50х100, ПеН-1Г-К/60х60, ПеН-1Г-К/60х70, ПеН-1Г-К/60х80, ПеН-1Г-К/60х90, ПеН-1Г-К/60х100, ПеН-1Г-К/70х70, ПеН-1Г-К/70х80, ПеН-1Г-К/70х90, ПеН-1Г-К/80х80, ПеН-1Г-К/80х90. 46. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	СМС, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-1Г-К+/30х50, ПеН-1Г-К+/30х60, ПеН-1Г-К+/30х70, ПеН-1Г-К+/30х80, ПеН-1Г-К+/30х90, ПеН-1Г-К+/30х100, ПеН-1Г-К+/40х40, ПеН-1Г-К+/40х50, ПеН-1Г-К+/40х60, ПеН-1Г-К+/40х70, ПеН-1Г-К+/40х80, ПеН-1Г-К+/40х90, ПеН-1Г-К+/40х100, ПеН-1Г-К+/50х50, ПеН-1Г-К+/50х60, ПеН-1Г-К+/50х70, ПеН-1Г-К+/50х80, ПеН-1Г-К+/50х90, ПеН-1Г-К+/50х100, ПеН-1Г-К+/60х60, ПеН-1Г-К+/60х70, ПеН-1Г-К+/60х80, ПеН-1Г-К+/60х90, ПеН-1Г-К+/60х100, ПеН-1Г-К+/70х70, ПеН-1Г-К+/70х80, ПеН-1Г-К+/70х90, ПеН-1Г-К+/80х80, ПеН-1Г-К+/80х90. 47. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-1Г-П/30х50, ПеН-1Г-П/30х60, ПеН-1Г-П/30х70, ПеН-1Г-П/30х80, ПеН-1Г-П/30х90, ПеН-1Г-П/30х100, ПеН-1Г-П/40х40, ПеН-1Г-П/40х50, ПеН-1Г-П/40х60, ПеН-1Г-П/40х70, ПеН-1Г-П/40х80, ПеН-1Г-П/40х90, ПеН-1Г-П/40х100, ПеН-1Г-П/50х50, ПеН-1Г-П/50х60, ПеН-1Г-П/50х70, ПеН-1Г-П/50х80, ПеН-1Г-П/50х90, ПеН-1Г-П/50х100, ПеН-1Г-П/60х60, ПеН-1Г-П/60х70, ПеН-1Г-П/60х80, ПеН-1Г-П/60х90, ПеН-1Г-П/60х100, ПеН-1Г-П/70х70, ПеН-1Г-П/70х80, ПеН-1Г-П/70х90, ПеН-1Г-П/80х80, ПеН-1Г-П/80х90. 48. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-1Г-П+/30х50, ПеН-1Г-П+/30х60, ПеН-1Г-П+/30х70, ПеН-1Г-П+/30х80, ПеН-1Г-П+/30х90, ПеН-1Г-П+/30х100, ПеН-1Г-П+/40х40, ПеН-1Г-П+/40х50, ПеН-1Г-П+/40х60, ПеН-1Г-П+/40х70, ПеН-1Г-П+/40х80, ПеН-1Г-П+/40х90, ПеН-1Г-П+/40х100, ПеН-1Г-П+/50х50, ПеН-1Г-П+/50х60, ПеН-1Г-П+/50х70, ПеН-1Г-П+/50х80, ПеН-1Г-П+/50х90, ПеН-1Г-П+/50х100, ПеН-1Г-П+/60х60, ПеН-1Г-П+/60х70, ПеН-1Г-П+/60х80, ПеН-1Г-П+/60х90, ПеН-1Г-П+/60х100, ПеН-1Г-П+/70х70, ПеН-1Г-П+/70х80, ПеН-1Г-П+/70х90, ПеН-1Г-П+/80х80, ПеН-1Г-П+/80х90. 49. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-1Ж-Э/30х50, ПеН-1Ж-Э/30х60, ПеН-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	1Ж-Э/30х70, ПеН-1Ж-Э/30х80, ПеН-1Ж-Э/30х90, ПеН-1Ж-Э/30х100, ПеН-1Ж-Э/40х40, ПеН-1Ж-Э/40х50, ПеН-1Ж-Э/40х60, ПеН-1Ж-Э/40х70, ПеН-1Ж-Э/40х80, ПеН-1Ж-Э/40х90, ПеН-1Ж-Э/40х100, ПеН-1Ж-Э/50х50, ПеН-1Ж-Э/50х60, ПеН-1Ж-Э/50х70, ПеН-1Ж-Э/50х80, ПеН-1Ж-Э/50х90, ПеН-1Ж-Э/50х100, ПеН-1Ж-Э/60х60, ПеН-1Ж-Э/60х70, ПеН-1Ж-Э/60х80, ПеН-1Ж-Э/60х90, ПеН-1Ж-Э/60х100, ПеН-1Ж-Э/70х70, ПеН-1Ж-Э/70х80, ПеН-1Ж-Э/70х90, ПеН-1Ж-Э/80х80, ПеН-1Ж-Э/80х90. 50. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-1Ж-С/30х50, ПеН-1Ж-С/30х60, ПеН-1Ж-С/30х70, ПеН-1Ж-С/30х80, ПеН-1Ж-С/30х90, ПеН-1Ж-С/30х100, ПеН-1Ж-С/40х40, ПеН-1Ж-С/40х50, ПеН-1Ж-С/40х60, ПеН-1Ж-С/40х70, ПеН-1Ж-С/40х80, ПеН-1Ж-С/40х90, ПеН-1Ж-С/40х100, ПеН-1Ж-С/50х50, ПеН-1Ж-С/50х60, ПеН-1Ж-С/50х70, ПеН-1Ж-С/50х80, ПеН-1Ж-С/50х90, ПеН-1Ж-С/50х100, ПеН-1Ж-С/60х60, ПеН-1Ж-С/60х70, ПеН-1Ж-С/60х80, ПеН-1Ж-С/60х90, ПеН-1Ж-С/60х100, ПеН-1Ж-С/70х70, ПеН-1Ж-С/70х80, ПеН-1Ж-С/70х90, ПеН-1Ж-С/80х80, ПеН-1Ж-С/80х90. 51. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-1Ж-К/30х50, ПеН-1Ж-К/30х60, ПеН-1Ж-К/30х70, ПеН-1Ж-К/30х80, ПеН-1Ж-К/30х90, ПеН-1Ж-К/30х100, ПеН-1Ж-К/40х40, ПеН-1Ж-К/40х50, ПеН-1Ж-К/40х60, ПеН-1Ж-К/40х70, ПеН-1Ж-К/40х80, ПеН-1Ж-К/40х90, ПеН-1Ж-К/40х100, ПеН-1Ж-К/50х50, ПеН-1Ж-К/50х60, ПеН-1Ж-К/50х70, ПеН-1Ж-К/50х80, ПеН-1Ж-К/50х90, ПеН-1Ж-К/50х100, ПеН-1Ж-К/60х60, ПеН-1Ж-К/60х70, ПеН-1Ж-К/60х80, ПеН-1Ж-К/60х90, ПеН-1Ж-К/60х100, ПеН-1Ж-К/70х70, ПеН-1Ж-К/70х80, ПеН-1Ж-К/70х90, ПеН-1Ж-К/80х80, ПеН-1Ж-К/80х90. 52. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-1Ж-К+/30х50, ПеН-1Ж-К+/30х60, ПеН-1Ж-К+/30х70, ПеН-1Ж-К+/30х80, ПеН-1Ж-К+/30х90, ПеН-1Ж-К+/30х100, ПеН-1Ж-К+/40х40, ПеН-1Ж-К+/40х50, ПеН-1Ж-К+/40х60, ПеН-1Ж-К+/40х70, ПеН-1Ж-К+/40х80, ПеН-1Ж-К+/40х90, ПеН-1Ж-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	К+/40х100, ПЕН-1Ж-К+/50х50, ПЕН-1Ж-К+/50х60, ПЕН-1Ж-К+/50х70, ПЕН-1Ж-К+/50х80, ПЕН-1Ж-К+/50х90, ПЕН-1Ж-К+/50х100, ПЕН-1Ж-К+/60х60, ПЕН-1Ж-К+/60х70, ПЕН-1Ж-К+/60х80, ПЕН-1Ж-К+/60х90, ПЕН-1Ж-К+/60х100, ПЕН-1Ж-К+/70х70, ПЕН-1Ж-К+/70х80, ПЕН-1Ж-К+/70х90, ПЕН-1Ж-К+/80х80, ПЕН-1Ж-К+/80х90. 53. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПЕН-1Ж-П/30х50, ПЕН-1Ж-П/30х60, ПЕН-1Ж-П/30х70, ПЕН-1Ж-П/30х80, ПЕН-1Ж-П/30х90, ПЕН-1Ж-П/30х100, ПЕН-1Ж-П/40х40, ПЕН-1Ж-П/40х50, ПЕН-1Ж-П/40х60, ПЕН-1Ж-П/40х70, ПЕН-1Ж-П/40х80, ПЕН-1Ж-П/40х90, ПЕН-1Ж-П/40х100, ПЕН-1Ж-П/50х50, ПЕН-1Ж-П/50х60, ПЕН-1Ж-П/50х70, ПЕН-1Ж-П/50х80, ПЕН-1Ж-П/50х90, ПЕН-1Ж-П/50х100, ПЕН-1Ж-П/60х60, ПЕН-1Ж-П/60х70, ПЕН-1Ж-П/60х80, ПЕН-1Ж-П/60х90, ПЕН-1Ж-П/60х100, ПЕН-1Ж-П/70х70, ПЕН-1Ж-П/70х80, ПЕН-1Ж-П/70х90, ПЕН-1Ж-П/80х80, ПЕН-1Ж-П/80х90. 54. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПЕН-1Ж-П+/30х50, ПЕН-1Ж-П+/30х60, ПЕН-1Ж-П+/30х70, ПЕН-1Ж-П+/30х80, ПЕН-1Ж-П+/30х90, ПЕН-1Ж-П+/30х100, ПЕН-1Ж-П+/40х40, ПЕН-1Ж-П+/40х50, ПЕН-1Ж-П+/40х60, ПЕН-1Ж-П+/40х70, ПЕН-1Ж-П+/40х80, ПЕН-1Ж-П+/40х90, ПЕН-1Ж-П+/40х100, ПЕН-1Ж-П+/50х50, ПЕН-1Ж-П+/50х60, ПЕН-1Ж-П+/50х70, ПЕН-1Ж-П+/50х80, ПЕН-1Ж-П+/50х90, ПЕН-1Ж-П+/50х100, ПЕН-1Ж-П+/60х60, ПЕН-1Ж-П+/60х70, ПЕН-1Ж-П+/60х80, ПЕН-1Ж-П+/60х90, ПЕН-1Ж-П+/60х100, ПЕН-1Ж-П+/70х70, ПЕН-1Ж-П+/70х80, ПЕН-1Ж-П+/70х90, ПЕН-1Ж-П+/80х80, ПЕН-1Ж-П+/80х90. 55. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПЕН-1Р-Э/30х50, ПЕН-1Р-Э/30х60, ПЕН-1Р-Э/30х70, ПЕН-1Р-Э/30х80, ПЕН-1Р-Э/30х90, ПЕН-1Р-Э/30х100, ПЕН-1Р-Э/40х40, ПЕН-1Р-Э/40х50, ПЕН-1Р-Э/40х60, ПЕН-1Р-Э/40х70, ПЕН-1Р-Э/40х80, ПЕН-1Р-Э/40х90, ПЕН-1Р-Э/40х100, ПЕН-1Р-Э/50х50, ПЕН-1Р-Э/50х60,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	Пен-1Р-Э/50х70, Пен-1Р-Э/50х80, Пен-1Р-Э/50х90, Пен-1Р-Э/50х100, Пен-1Р-Э/60х60, Пен-1Р-Э/60х70, Пен-1Р-Э/60х80, Пен-1Р-Э/60х90, Пен-1Р-Э/60х100, Пен-1Р-Э/70х70, Пен-1Р-Э/70х80, Пен-1Р-Э/70х90, Пен-1Р-Э/80х80, Пен-1Р-Э/80х90. 56. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: Пен-1Р-С/30х50, Пен-1Р-С/30х60, Пен-1Р-С/30х70, Пен-1Р-С/30х80, Пен-1Р-С/30х90, Пен-1Р-С/30х100, Пен-1Р-С/40х40, Пен-1Р-С/40х50, Пен-1Р-С/40х60, Пен-1Р-С/40х70, Пен-1Р-С/40х80, Пен-1Р-С/40х90, Пен-1Р-С/40х100, Пен-1Р-С/50х50, Пен-1Р-С/50х60, Пен-1Р-С/50х70, Пен-1Р-С/50х80, Пен-1Р-С/50х90, Пен-1Р-С/50х100, Пен-1Р-С/60х60, Пен-1Р-С/60х70, Пен-1Р-С/60х80, Пен-1Р-С/60х90, Пен-1Р-С/60х100, Пен-1Р-С/70х70, Пен-1Р-С/70х80, Пен-1Р-С/70х90, Пен-1Р-С/80х80, Пен-1Р-С/80х90. 57. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: Пен-1Р-К/30х50, Пен-1Р-К/30х60, Пен-1Р-К/30х70, Пен-1Р-К/30х80, Пен-1Р-К/30х90, Пен-1Р-К/30х100, Пен-1Р-К/40х40, Пен-1Р-К/40х50, Пен-1Р-К/40х60, Пен-1Р-К/40х70, Пен-1Р-К/40х80, Пен-1Р-К/40х90, Пен-1Р-К/40х100, Пен-1Р-К/50х50, Пен-1Р-К/50х60, Пен-1Р-К/50х70, Пен-1Р-К/50х80, Пен-1Р-К/50х90, Пен-1Р-К/50х100, Пен-1Р-К/60х60, Пен-1Р-К/60х70, Пен-1Р-К/60х80, Пен-1Р-К/60х90, Пен-1Р-К/60х100, Пен-1Р-К/70х70, Пен-1Р-К/70х80, Пен-1Р-К/70х90, Пен-1Р-К/80х80, Пен-1Р-К/80х90. 58. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: Пен-1Р-К+/30х50, Пен-1Р-К+/30х60, Пен-1Р-К+/30х70, Пен-1Р-К+/30х80, Пен-1Р-К+/30х90, Пен-1Р-К+/30х100, Пен-1Р-К+/40х40, Пен-1Р-К+/40х50, Пен-1Р-К+/40х60, Пен-1Р-К+/40х70, Пен-1Р-К+/40х80, Пен-1Р-К+/40х90, Пен-1Р-К+/40х100, Пен-1Р-К+/50х50, Пен-1Р-К+/50х60, Пен-1Р-К+/50х70, Пен-1Р-К+/50х80, Пен-1Р-К+/50х90, Пен-1Р-К+/50х100, Пен-1Р-К+/60х60, Пен-1Р-К+/60х70, Пен-1Р-К+/60х80, Пен-1Р-К+/60х90, Пен-1Р-К+/60х100, Пен-1Р-К+/70х70, Пен-1Р-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	К+/70x80, ПеН-1Р-К+/70x90, ПеН-1Р-К+/80x80, ПеН-1Р-К+/80x90. 59. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-1Р-П/30x50, ПеН-1Р-П/30x60, ПеН-1Р-П/30x70, ПеН-1Р-П/30x80, ПеН-1Р-П/30x90, ПеН-1Р-П/30x100, ПеН-1Р-П/40x40, ПеН-1Р-П/40x50, ПеН-1Р-П/40x60, ПеН-1Р-П/40x70, ПеН-1Р-П/40x80, ПеН-1Р-П/40x90, ПеН-1Р-П/40x100, ПеН-1Р-П/50x50, ПеН-1Р-П/50x60, ПеН-1Р-П/50x70, ПеН-1Р-П/50x80, ПеН-1Р-П/50x90, ПеН-1Р-П/50x100, ПеН-1Р-П/60x60, ПеН-1Р-П/60x70, ПеН-1Р-П/60x80, ПеН-1Р-П/60x90, ПеН-1Р-П/60x100, ПеН-1Р-П/70x70, ПеН-1Р-П/70x80, ПеН-1Р-П/70x90, ПеН-1Р-П/80x80, ПеН-1Р-П/80x90. 60. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-1Р-П+/30x50, ПеН-1Р-П+/30x60, ПеН-1Р-П+/30x70, ПеН-1Р-П+/30x80, ПеН-1Р-П+/30x90, ПеН-1Р-П+/30x100, ПеН-1Р-П+/40x40, ПеН-1Р-П+/40x50, ПеН-1Р-П+/40x60, ПеН-1Р-П+/40x70, ПеН-1Р-П+/40x80, ПеН-1Р-П+/40x90, ПеН-1Р-П+/40x100, ПеН-1Р-П+/50x50, ПеН-1Р-П+/50x60, ПеН-1Р-П+/50x70, ПеН-1Р-П+/50x80, ПеН-1Р-П+/50x90, ПеН-1Р-П+/50x100, ПеН-1Р-П+/60x60, ПеН-1Р-П+/60x70, ПеН-1Р-П+/60x80, ПеН-1Р-П+/60x90, ПеН-1Р-П+/60x100, ПеН-1Р-П+/70x70, ПеН-1Р-П+/70x80, ПеН-1Р-П+/70x90, ПеН-1Р-П+/80x80, ПеН-1Р-П+/80x90. 61. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-13-Э/30x50, ПеН-13-Э/30x60, ПеН-13-Э/30x70, ПеН-13-Э/30x80, ПеН-13-Э/30x90, ПеН-13-Э/30x100, ПеН-13-Э/40x40, ПеН-13-Э/40x50, ПеН-13-Э/40x60, ПеН-13-Э/40x70, ПеН-13-Э/40x80, ПеН-13-Э/40x90, ПеН-13-Э/40x100, ПеН-13-Э/50x50, ПеН-13-Э/50x60, ПеН-13-Э/50x70, ПеН-13-Э/50x80, ПеН-13-Э/50x90, ПеН-13-Э/50x100, ПеН-13-Э/60x60, ПеН-13-Э/60x70, ПеН-13-Э/60x80, ПеН-13-Э/60x90, ПеН-13-Э/60x100, ПеН-13-Э/70x70, ПеН-13-Э/70x80, ПеН-13-Э/70x90, ПеН-13-Э/80x80, ПеН-13-Э/80x90. 62. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	СМС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-13-С/30х50, ПеН-13-С/30х60, ПеН-13-С/30х70, ПеН-13-С/30х80, ПеН-13-С/30х90, ПеН-13-С/30х100, ПеН-13-С/40х40, ПеН-13-С/40х50, ПеН-13-С/40х60, ПеН-13-С/40х70, ПеН-13-С/40х80, ПеН-13-С/40х90, ПеН-13-С/40х100, ПеН-13-С/50х50, ПеН-13-С/50х60, ПеН-13-С/50х70, ПеН-13-С/50х80, ПеН-13-С/50х90, ПеН-13-С/50х100, ПеН-13-С/60х60, ПеН-13-С/60х70, ПеН-13-С/60х80, ПеН-13-С/60х90, ПеН-13-С/60х100, ПеН-13-С/70х70, ПеН-13-С/70х80, ПеН-13-С/70х90, ПеН-13-С/80х80, ПеН-13-С/80х90. 63. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-13-К/30х50, ПеН-13-К/30х60, ПеН-13-К/30х70, ПеН-13-К/30х80, ПеН-13-К/30х90, ПеН-13-К/30х100, ПеН-13-К/40х40, ПеН-13-К/40х50, ПеН-13-К/40х60, ПеН-13-К/40х70, ПеН-13-К/40х80, ПеН-13-К/40х90, ПеН-13-К/40х100, ПеН-13-К/50х50, ПеН-13-К/50х60, ПеН-13-К/50х70, ПеН-13-К/50х80, ПеН-13-К/50х90, ПеН-13-К/50х100, ПеН-13-К/60х60, ПеН-13-К/60х70, ПеН-13-К/60х80, ПеН-13-К/60х90, ПеН-13-К/60х100, ПеН-13-К/70х70, ПеН-13-К/70х80, ПеН-13-К/70х90, ПеН-13-К/80х80, ПеН-13-К/80х90. 64. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-13-К+/30х50, ПеН-13-К+/30х60, ПеН-13-К+/30х70, ПеН-13-К+/30х80, ПеН-13-К+/30х90, ПеН-13-К+/30х100, ПеН-13-К+/40х40, ПеН-13-К+/40х50, ПеН-13-К+/40х60, ПеН-13-К+/40х70, ПеН-13-К+/40х80, ПеН-13-К+/40х90, ПеН-13-К+/40х100, ПеН-13-К+/50х50, ПеН-13-К+/50х60, ПеН-13-К+/50х70, ПеН-13-К+/50х80, ПеН-13-К+/50х90, ПеН-13-К+/50х100, ПеН-13-К+/60х60, ПеН-13-К+/60х70, ПеН-13-К+/60х80, ПеН-13-К+/60х90, ПеН-13-К+/60х100, ПеН-13-К+/70х70, ПеН-13-К+/70х80, ПеН-13-К+/70х90, ПеН-13-К+/80х80, ПеН-13-К+/80х90. 65. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-13-П/30х50, ПеН-13-П/30х60, ПеН-13-П/30х70, ПеН-13-П/30х80, ПеН-13-П/30х90, ПеН-13-П/30х100, ПеН-13-П/40х40, ПеН-13-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	П/40х50, ПеН-13-П/40х60, ПеН-13-П/40х70, ПеН-13-П/40х80, ПеН-13-П/40х90, ПеН-13-П/40х100, ПеН-13-П/50х50, ПеН-13-П/50х60, ПеН-13-П/50х70, ПеН-13-П/50х80, ПеН-13-П/50х90, ПеН-13-П/50х100, ПеН-13-П/60х60, ПеН-13-П/60х70, ПеН-13-П/60х80, ПеН-13-П/60х90, ПеН-13-П/60х100, ПеН-13-П/70х70, ПеН-13-П/70х80, ПеН-13-П/70х90, ПеН-13-П/80х80, ПеН-13-П/80х90. 66. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-13-П+/30х50, ПеН-13-П+/30х60, ПеН-13-П+/30х70, ПеН-13-П+/30х80, ПеН-13-П+/30х90, ПеН-13-П+/30х100, ПеН-13-П+/40х40, ПеН-13-П+/40х50, ПеН-13-П+/40х60, ПеН-13-П+/40х70, ПеН-13-П+/40х80, ПеН-13-П+/40х90, ПеН-13-П+/40х100, ПеН-13-П+/50х50, ПеН-13-П+/50х60, ПеН-13-П+/50х70, ПеН-13-П+/50х80, ПеН-13-П+/50х90, ПеН-13-П+/50х100, ПеН-13-П+/60х60, ПеН-13-П+/60х70, ПеН-13-П+/60х80, ПеН-13-П+/60х90, ПеН-13-П+/60х100, ПеН-13-П+/70х70, ПеН-13-П+/70х80, ПеН-13-П+/70х90, ПеН-13-П+/80х80, ПеН-13-П+/80х90. 67. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-1Ф-Э/30х50, ПеН-1Ф-Э/30х60, ПеН-1Ф-Э/30х70, ПеН-1Ф-Э/30х80, ПеН-1Ф-Э/30х90, ПеН-1Ф-Э/30х100, ПеН-1Ф-Э/40х40, ПеН-1Ф-Э/40х50, ПеН-1Ф-Э/40х60, ПеН-1Ф-Э/40х70, ПеН-1Ф-Э/40х80, ПеН-1Ф-Э/40х90, ПеН-1Ф-Э/40х100, ПеН-1Ф-Э/50х50, ПеН-1Ф-Э/50х60, ПеН-1Ф-Э/50х70, ПеН-1Ф-Э/50х80, ПеН-1Ф-Э/50х90, ПеН-1Ф-Э/50х100, ПеН-1Ф-Э/60х60, ПеН-1Ф-Э/60х70, ПеН-1Ф-Э/60х80, ПеН-1Ф-Э/60х90, ПеН-1Ф-Э/60х100, ПеН-1Ф-Э/70х70, ПеН-1Ф-Э/70х80, ПеН-1Ф-Э/70х90, ПеН-1Ф-Э/80х80, ПеН-1Ф-Э/80х90. 68. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-1Ф-С/30х50, ПеН-1Ф-С/30х60, ПеН-1Ф-С/30х70, ПеН-1Ф-С/30х80, ПеН-1Ф-С/30х90, ПеН-1Ф-С/30х100, ПеН-1Ф-С/40х40, ПеН-1Ф-С/40х50, ПеН-1Ф-С/40х60, ПеН-1Ф-С/40х70, ПеН-1Ф-С/40х80, ПеН-1Ф-С/40х90, ПеН-1Ф-С/40х100, ПеН-1Ф-С/50х50, ПеН-1Ф-С/50х60, ПеН-1Ф-С/50х70, ПеН-1Ф-С/50х80, ПеН-1Ф-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	С/50х90, ПеН-1Ф-С/50х100, ПеН-1Ф-С/60х60, ПеН-1Ф-С/60х70, ПеН-1Ф-С/60х80, ПеН-1Ф-С/60х90, ПеН-1Ф-С/60х100, ПеН-1Ф-С/70х70, ПеН-1Ф-С/70х80, ПеН-1Ф-С/70х90, ПеН-1Ф-С/80х80, ПеН-1Ф-С/80х90. 69. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-1Ф-К/30х50, ПеН-1Ф-К/30х60, ПеН-1Ф-К/30х70, ПеН-1Ф-К/30х80, ПеН-1Ф-К/30х90, ПеН-1Ф-К/30х100, ПеН-1Ф-К/40х40, ПеН-1Ф-К/40х50, ПеН-1Ф-К/40х60, ПеН-1Ф-К/40х70, ПеН-1Ф-К/40х80, ПеН-1Ф-К/40х90, ПеН-1Ф-К/40х100, ПеН-1Ф-К/50х50, ПеН-1Ф-К/50х60, ПеН-1Ф-К/50х70, ПеН-1Ф-К/50х80, ПеН-1Ф-К/50х90, ПеН-1Ф-К/50х100, ПеН-1Ф-К/60х60, ПеН-1Ф-К/60х70, ПеН-1Ф-К/60х80, ПеН-1Ф-К/60х90, ПеН-1Ф-К/60х100, ПеН-1Ф-К/70х70, ПеН-1Ф-К/70х80, ПеН-1Ф-К/70х90, ПеН-1Ф-К/80х80, ПеН-1Ф-К/80х90. 70. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-1Ф-К+/30х50, ПеН-1Ф-К+/30х60, ПеН-1Ф-К+/30х70, ПеН-1Ф-К+/30х80, ПеН-1Ф-К+/30х90, ПеН-1Ф-К+/30х100, ПеН-1Ф-К+/40х40, ПеН-1Ф-К+/40х50, ПеН-1Ф-К+/40х60, ПеН-1Ф-К+/40х70, ПеН-1Ф-К+/40х80, ПеН-1Ф-К+/40х90, ПеН-1Ф-К+/40х100, ПеН-1Ф-К+/50х50, ПеН-1Ф-К+/50х60, ПеН-1Ф-К+/50х70, ПеН-1Ф-К+/50х80, ПеН-1Ф-К+/50х90, ПеН-1Ф-К+/50х100, ПеН-1Ф-К+/60х60, ПеН-1Ф-К+/60х70, ПеН-1Ф-К+/60х80, ПеН-1Ф-К+/60х90, ПеН-1Ф-К+/60х100, ПеН-1Ф-К+/70х70, ПеН-1Ф-К+/70х80, ПеН-1Ф-К+/70х90, ПеН-1Ф-К+/80х80, ПеН-1Ф-К+/80х90. 71. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-1Ф-П/30х50, ПеН-1Ф-П/30х60, ПеН-1Ф-П/30х70, ПеН-1Ф-П/30х80, ПеН-1Ф-П/30х90, ПеН-1Ф-П/30х100, ПеН-1Ф-П/40х40, ПеН-1Ф-П/40х50, ПеН-1Ф-П/40х60, ПеН-1Ф-П/40х70, ПеН-1Ф-П/40х80, ПеН-1Ф-П/40х90, ПеН-1Ф-П/40х100, ПеН-1Ф-П/50х50, ПеН-1Ф-П/50х60, ПеН-1Ф-П/50х70, ПеН-1Ф-П/50х80, ПеН-1Ф-П/50х90, ПеН-1Ф-П/50х100, ПеН-1Ф-П/60х60, ПеН-1Ф-П/60х70, ПеН-1Ф-П/60х80,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ПеН-1Ф-П/60х90, ПеН-1Ф-П/60х100, ПеН-1Ф-П/70х70, ПеН-1Ф-П/70х80, ПеН-1Ф-П/70х90, ПеН-1Ф-П/80х80, ПеН-1Ф-П/80х90. 72. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-1Ф-П+/30х50, ПеН-1Ф-П+/30х60, ПеН-1Ф-П+/30х70, ПеН-1Ф-П+/30х80, ПеН-1Ф-П+/30х90, ПеН-1Ф-П+/30х100, ПеН-1Ф-П+/40х40, ПеН-1Ф-П+/40х50, ПеН-1Ф-П+/40х60, ПеН-1Ф-П+/40х70, ПеН-1Ф-П+/40х80, ПеН-1Ф-П+/40х90, ПеН-1Ф-П+/40х100, ПеН-1Ф-П+/50х50, ПеН-1Ф-П+/50х60, ПеН-1Ф-П+/50х70, ПеН-1Ф-П+/50х80, ПеН-1Ф-П+/50х90, ПеН-1Ф-П+/50х100, ПеН-1Ф-П+/60х60, ПеН-1Ф-П+/60х70, ПеН-1Ф-П+/60х80, ПеН-1Ф-П+/60х90, ПеН-1Ф-П+/60х100, ПеН-1Ф-П+/70х70, ПеН-1Ф-П+/70х80, ПеН-1Ф-П+/70х90, ПеН-1Ф-П+/80х80, ПеН-1Ф-П+/80х90. 73. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-2Б-Э/30х50, ПеН-2Б-Э/30х60, ПеН-2Б-Э/30х70, ПеН-2Б-Э/30х80, ПеН-2Б-Э/30х90, ПеН-2Б-Э/30х100, ПеН-2Б-Э/40х40, ПеН-2Б-Э/40х50, ПеН-2Б-Э/40х60, ПеН-2Б-Э/40х70, ПеН-2Б-Э/40х80, ПеН-2Б-Э/40х90, ПеН-2Б-Э/40х100, ПеН-2Б-Э/50х50, ПеН-2Б-Э/50х60, ПеН-2Б-Э/50х70, ПеН-2Б-Э/50х80, ПеН-2Б-Э/50х90, ПеН-2Б-Э/50х100, ПеН-2Б-Э/60х60, ПеН-2Б-Э/60х70, ПеН-2Б-Э/60х80, ПеН-2Б-Э/60х90, ПеН-2Б-Э/60х100, ПеН-2Б-Э/70х70, ПеН-2Б-Э/70х80, ПеН-2Б-Э/70х90, ПеН-2Б-Э/80х80, ПеН-2Б-Э/80х90. 74. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-2Б-С/30х50, ПеН-2Б-С/30х60, ПеН-2Б-С/30х70, ПеН-2Б-С/30х80, ПеН-2Б-С/30х90, ПеН-2Б-С/30х100, ПеН-2Б-С/40х40, ПеН-2Б-С/40х50, ПеН-2Б-С/40х60, ПеН-2Б-С/40х70, ПеН-2Б-С/40х80, ПеН-2Б-С/40х90, ПеН-2Б-С/40х100, ПеН-2Б-С/50х50, ПеН-2Б-С/50х60, ПеН-2Б-С/50х70, ПеН-2Б-С/50х80, ПеН-2Б-С/50х90, ПеН-2Б-С/50х100, ПеН-2Б-С/60х60, ПеН-2Б-С/60х70, ПеН-2Б-С/60х80, ПеН-2Б-С/60х90, ПеН-2Б-С/60х100, ПеН-2Б-С/70х70, ПеН-2Б-С/70х80, ПеН-2Б-С/70х90, ПеН-2Б-С/80х80, ПеН-2Б-С/80х90.		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	75. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-2Б-К/30х50, ПеН-2Б-К/30х60, ПеН-2Б-К/30х70, ПеН-2Б-К/30х80, ПеН-2Б-К/30х90, ПеН-2Б-К/30х100, ПеН-2Б-К/40х40, ПеН-2Б-К/40х50, ПеН-2Б-К/40х60, ПеН-2Б-К/40х70, ПеН-2Б-К/40х80, ПеН-2Б-К/40х90, ПеН-2Б-К/40х100, ПеН-2Б-К/50х50, ПеН-2Б-К/50х60, ПеН-2Б-К/50х70, ПеН-2Б-К/50х80, ПеН-2Б-К/50х90, ПеН-2Б-К/50х100, ПеН-2Б-К/60х60, ПеН-2Б-К/60х70, ПеН-2Б-К/60х80, ПеН-2Б-К/60х90, ПеН-2Б-К/60х100, ПеН-2Б-К/70х70, ПеН-2Б-К/70х80, ПеН-2Б-К/70х90, ПеН-2Б-К/80х80, ПеН-2Б-К/80х90. 76. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-2Б-К+/30х50, ПеН-2Б-К+/30х60, ПеН-2Б-К+/30х70, ПеН-2Б-К+/30х80, ПеН-2Б-К+/30х90, ПеН-2Б-К+/30х100, ПеН-2Б-К+/40х40, ПеН-2Б-К+/40х50, ПеН-2Б-К+/40х60, ПеН-2Б-К+/40х70, ПеН-2Б-К+/40х80, ПеН-2Б-К+/40х90, ПеН-2Б-К+/40х100, ПеН-2Б-К+/50х50, ПеН-2Б-К+/50х60, ПеН-2Б-К+/50х70, ПеН-2Б-К+/50х80, ПеН-2Б-К+/50х90, ПеН-2Б-К+/50х100, ПеН-2Б-К+/60х60, ПеН-2Б-К+/60х70, ПеН-2Б-К+/60х80, ПеН-2Б-К+/60х90, ПеН-2Б-К+/60х100, ПеН-2Б-К+/70х70, ПеН-2Б-К+/70х80, ПеН-2Б-К+/70х90, ПеН-2Б-К+/80х80, ПеН-2Б-К+/80х90. 77. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-2Б-П/30х50, ПеН-2Б-П/30х60, ПеН-2Б-П/30х70, ПеН-2Б-П/30х80, ПеН-2Б-П/30х90, ПеН-2Б-П/30х100, ПеН-2Б-П/40х40, ПеН-2Б-П/40х50, ПеН-2Б-П/40х60, ПеН-2Б-П/40х70, ПеН-2Б-П/40х80, ПеН-2Б-П/40х90, ПеН-2Б-П/40х100, ПеН-2Б-П/50х50, ПеН-2Б-П/50х60, ПеН-2Б-П/50х70, ПеН-2Б-П/50х80, ПеН-2Б-П/50х90, ПеН-2Б-П/50х100, ПеН-2Б-П/60х60, ПеН-2Б-П/60х70, ПеН-2Б-П/60х80, ПеН-2Б-П/60х90, ПеН-2Б-П/60х100, ПеН-2Б-П/70х70, ПеН-2Б-П/70х80, ПеН-2Б-П/70х90, ПеН-2Б-П/80х80, ПеН-2Б-П/80х90. 78. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-2Б-П+/30х50, ПеН-2Б-П+/30х60, ПеН-2Б-П+/30х70,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	Пен-2Б-П+/30x80, Пен-2Б-П+/30x90, Пен-2Б-П+/30x100, Пен-2Б-П+/40x40, Пен-2Б-П+/40x50, Пен-2Б-П+/40x60, Пен-2Б-П+/40x70, Пен-2Б-П+/40x80, Пен-2Б-П+/40x90, Пен-2Б-П+/40x100, Пен-2Б-П+/50x50, Пен-2Б-П+/50x60, Пен-2Б-П+/50x70, Пен-2Б-П+/50x80, Пен-2Б-П+/50x90, Пен-2Б-П+/50x100, Пен-2Б-П+/60x60, Пен-2Б-П+/60x70, Пен-2Б-П+/60x80, Пен-2Б-П+/60x90, Пен-2Б-П+/60x100, Пен-2Б-П+/70x70, Пен-2Б-П+/70x80, Пен-2Б-П+/70x90, Пен-2Б-П+/80x80, Пен-2Б-П+/80x90. 79. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: Пен-2Г-Э/30x50, Пен-2Г-Э/30x60, Пен-2Г-Э/30x70, Пен-2Г-Э/30x80, Пен-2Г-Э/30x90, Пен-2Г-Э/30x100, Пен-2Г-Э/40x40, Пен-2Г-Э/40x50, Пен-2Г-Э/40x60, Пен-2Г-Э/40x70, Пен-2Г-Э/40x80, Пен-2Г-Э/40x90, Пен-2Г-Э/40x100, Пен-2Г-Э/50x50, Пен-2Г-Э/50x60, Пен-2Г-Э/50x70, Пен-2Г-Э/50x80, Пен-2Г-Э/50x90, Пен-2Г-Э/50x100, Пен-2Г-Э/60x60, Пен-2Г-Э/60x70, Пен-2Г-Э/60x80, Пен-2Г-Э/60x90, Пен-2Г-Э/60x100, Пен-2Г-Э/70x70, Пен-2Г-Э/70x80, Пен-2Г-Э/70x90, Пен-2Г-Э/80x80, Пен-2Г-Э/80x90. 80. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: Пен-2Г-С/30x50, Пен-2Г-С/30x60, Пен-2Г-С/30x70, Пен-2Г-С/30x80, Пен-2Г-С/30x90, Пен-2Г-С/30x100, Пен-2Г-С/40x40, Пен-2Г-С/40x50, Пен-2Г-С/40x60, Пен-2Г-С/40x70, Пен-2Г-С/40x80, Пен-2Г-С/40x90, Пен-2Г-С/40x100, Пен-2Г-С/50x50, Пен-2Г-С/50x60, Пен-2Г-С/50x70, Пен-2Г-С/50x80, Пен-2Г-С/50x90, Пен-2Г-С/50x100, Пен-2Г-С/60x60, Пен-2Г-С/60x70, Пен-2Г-С/60x80, Пен-2Г-С/60x90, Пен-2Г-С/60x100, Пен-2Г-С/70x70, Пен-2Г-С/70x80, Пен-2Г-С/70x90, Пен-2Г-С/80x80, Пен-2Г-С/80x90. 81. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: Пен-2Г-К/30x50, Пен-2Г-К/30x60, Пен-2Г-К/30x70, Пен-2Г-К/30x80, Пен-2Г-К/30x90, Пен-2Г-К/30x100, Пен-2Г-К/40x40, Пен-2Г-К/40x50, Пен-2Г-К/40x60, Пен-2Г-К/40x70, Пен-2Г-К/40x80, Пен-2Г-К/40x90, Пен-2Г-К/40x100, Пен-2Г-К/50x50, Пен-2Г-К/50x60, Пен-2Г-К/50x70, Пен-2Г-К/50x80, Пен-2Г-К/50x90, Пен-2Г-К/50x100.		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	К/50х70, ПеН-2Г-К/50х80, ПеН-2Г-К/50х90, ПеН-2Г-К/50х100, ПеН-2Г-К/60х60, ПеН-2Г-К/60х70, ПеН-2Г-К/60х80, ПеН-2Г-К/60х90, ПеН-2Г-К/60х100, ПеН-2Г-К/70х70, ПеН-2Г-К/70х80, ПеН-2Г-К/70х90, ПеН-2Г-К/80х80, ПеН-2Г-К/80х90. 82. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-2Г-К+/30х50, ПеН-2Г-К+/30х60, ПеН-2Г-К+/30х70, ПеН-2Г-К+/30х80, ПеН-2Г-К+/30х90, ПеН-2Г-К+/30х100, ПеН-2Г-К+/40х40, ПеН-2Г-К+/40х50, ПеН-2Г-К+/40х60, ПеН-2Г-К+/40х70, ПеН-2Г-К+/40х80, ПеН-2Г-К+/40х90, ПеН-2Г-К+/50х50, ПеН-2Г-К+/50х60, ПеН-2Г-К+/50х70, ПеН-2Г-К+/50х80, ПеН-2Г-К+/50х90, ПеН-2Г-К+/60х70, ПеН-2Г-К+/60х80, ПеН-2Г-К+/60х90, ПеН-2Г-К+/70х70, ПеН-2Г-К+/70х80, ПеН-2Г-К+/70х90, ПеН-2Г-К+/80х80, ПеН-2Г-К+/80х90. 83. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-2Г-П/30х50, ПеН-2Г-П/30х60, ПеН-2Г-П/30х70, ПеН-2Г-П/30х80, ПеН-2Г-П/30х90, ПеН-2Г-П/40х50, ПеН-2Г-П/40х60, ПеН-2Г-П/40х70, ПеН-2Г-П/40х80, ПеН-2Г-П/40х90, ПеН-2Г-П/50х50, ПеН-2Г-П/50х60, ПеН-2Г-П/50х70, ПеН-2Г-П/50х80, ПеН-2Г-П/50х90, ПеН-2Г-П/60х60, ПеН-2Г-П/60х70, ПеН-2Г-П/60х80, ПеН-2Г-П/60х90, ПеН-2Г-П/70х70, ПеН-2Г-П/70х80, ПеН-2Г-П/70х90, ПеН-2Г-П/80х80, ПеН-2Г-П/80х90. 84. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-2Г-П+/30х50, ПеН-2Г-П+/30х60, ПеН-2Г-П+/30х70, ПеН-2Г-П+/30х80, ПеН-2Г-П+/30х90, ПеН-2Г-П+/40х40, ПеН-2Г-П+/40х50, ПеН-2Г-П+/40х60, ПеН-2Г-П+/40х70, ПеН-2Г-П+/40х80, ПеН-2Г-П+/40х90, ПеН-2Г-П+/50х50, ПеН-2Г-П+/50х60, ПеН-2Г-П+/50х70, ПеН-2Г-П+/50х80, ПеН-2Г-П+/50х90, ПеН-2Г-П+/60х60, ПеН-2Г-П+/60х70, ПеН-2Г-П+/60х80, ПеН-2Г-П+/60х90.		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	П+/70х70, ПеН-2Г-П+/70х80, ПеН-2Г-П+/70х90, ПеН-2Г-П+/80х80, ПеН-2Г-П+/80х90. 85. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-2Ж-Э/30х50, ПеН-2Ж-Э/30х60, ПеН-2Ж-Э/30х70, ПеН-2Ж-Э/30х80, ПеН-2Ж-Э/30х90, ПеН-2Ж-Э/30х100, ПеН-2Ж-Э/40х40, ПеН-2Ж-Э/40х50, ПеН-2Ж-Э/40х60, ПеН-2Ж-Э/40х70, ПеН-2Ж-Э/40х80, ПеН-2Ж-Э/40х90, ПеН-2Ж-Э/40х100, ПеН-2Ж-Э/50х50, ПеН-2Ж-Э/50х60, ПеН-2Ж-Э/50х70, ПеН-2Ж-Э/50х80, ПеН-2Ж-Э/50х90, ПеН-2Ж-Э/50х100, ПеН-2Ж-Э/60х60, ПеН-2Ж-Э/60х70, ПеН-2Ж-Э/60х80, ПеН-2Ж-Э/60х90, ПеН-2Ж-Э/60х100, ПеН-2Ж-Э/70х70, ПеН-2Ж-Э/70х80, ПеН-2Ж-Э/70х90, ПеН-2Ж-Э/80х80, ПеН-2Ж-Э/80х90. 86. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-2Ж-С/30х50, ПеН-2Ж-С/30х60, ПеН-2Ж-С/30х70, ПеН-2Ж-С/30х80, ПеН-2Ж-С/30х90, ПеН-2Ж-С/30х100, ПеН-2Ж-С/40х40, ПеН-2Ж-С/40х50, ПеН-2Ж-С/40х60, ПеН-2Ж-С/40х70, ПеН-2Ж-С/40х80, ПеН-2Ж-С/40х90, ПеН-2Ж-С/40х100, ПеН-2Ж-С/50х50, ПеН-2Ж-С/50х60, ПеН-2Ж-С/50х70, ПеН-2Ж-С/50х80, ПеН-2Ж-С/50х90, ПеН-2Ж-С/50х100, ПеН-2Ж-С/60х60, ПеН-2Ж-С/60х70, ПеН-2Ж-С/60х80, ПеН-2Ж-С/60х90, ПеН-2Ж-С/60х100, ПеН-2Ж-С/70х70, ПеН-2Ж-С/70х80, ПеН-2Ж-С/70х90, ПеН-2Ж-С/80х80, ПеН-2Ж-С/80х90. 87. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-2Ж-К/30х50, ПеН-2Ж-К/30х60, ПеН-2Ж-К/30х70, ПеН-2Ж-К/30х80, ПеН-2Ж-К/30х90, ПеН-2Ж-К/30х100, ПеН-2Ж-К/40х40, ПеН-2Ж-К/40х50, ПеН-2Ж-К/40х60, ПеН-2Ж-К/40х70, ПеН-2Ж-К/40х80, ПеН-2Ж-К/40х90, ПеН-2Ж-К/40х100, ПеН-2Ж-К/50х50, ПеН-2Ж-К/50х60, ПеН-2Ж-К/50х70, ПеН-2Ж-К/50х80, ПеН-2Ж-К/50х90, ПеН-2Ж-К/50х100, ПеН-2Ж-К/60х60, ПеН-2Ж-К/60х70, ПеН-2Ж-К/60х80, ПеН-2Ж-К/60х90, ПеН-2Ж-К/60х100, ПеН-2Ж-К/70х70, ПеН-2Ж-К/70х80, ПеН-2Ж-К/70х90, ПеН-2Ж-К/80х80, ПеН-2Ж-К/80х90. 88. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, желтого цвета, с поверхностной плотностью		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-2Ж-К+/30х50, ПеН-2Ж-К+/30х60, ПеН-2Ж-К+/30х70, ПеН-2Ж-К+/30х80, ПеН-2Ж-К+/30х90, ПеН-2Ж-К+/30х100, ПеН-2Ж-К+/40х40, ПеН-2Ж-К+/40х50, ПеН-2Ж-К+/40х60, ПеН-2Ж-К+/40х70, ПеН-2Ж-К+/40х80, ПеН-2Ж-К+/40х90, ПеН-2Ж-К+/40х100, ПеН-2Ж-К+/50х50, ПеН-2Ж-К+/50х60, ПеН-2Ж-К+/50х70, ПеН-2Ж-К+/50х80, ПеН-2Ж-К+/50х90, ПеН-2Ж-К+/50х100, ПеН-2Ж-К+/60х60, ПеН-2Ж-К+/60х70, ПеН-2Ж-К+/60х80, ПеН-2Ж-К+/60х90, ПеН-2Ж-К+/60х100, ПеН-2Ж-К+/70х70, ПеН-2Ж-К+/70х80, ПеН-2Ж-К+/70х90, ПеН-2Ж-К+/80х80, ПеН-2Ж-К+/80х90. 89. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-2Ж-П/30х50, ПеН-2Ж-П/30х60, ПеН-2Ж-П/30х70, ПеН-2Ж-П/30х80, ПеН-2Ж-П/30х90, ПеН-2Ж-П/30х100, ПеН-2Ж-П/40х40, ПеН-2Ж-П/40х50, ПеН-2Ж-П/40х60, ПеН-2Ж-П/40х70, ПеН-2Ж-П/40х80, ПеН-2Ж-П/40х90, ПеН-2Ж-П/40х100, ПеН-2Ж-П/50х50, ПеН-2Ж-П/50х60, ПеН-2Ж-П/50х70, ПеН-2Ж-П/50х80, ПеН-2Ж-П/50х90, ПеН-2Ж-П/50х100, ПеН-2Ж-П/60х60, ПеН-2Ж-П/60х70, ПеН-2Ж-П/60х80, ПеН-2Ж-П/60х90, ПеН-2Ж-П/60х100, ПеН-2Ж-П/70х70, ПеН-2Ж-П/70х80, ПеН-2Ж-П/70х90, ПеН-2Ж-П/80х80, ПеН-2Ж-П/80х90. 90. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-2Ж-П+/30х50, ПеН-2Ж-П+/30х60, ПеН-2Ж-П+/30х70, ПеН-2Ж-П+/30х80, ПеН-2Ж-П+/30х90, ПеН-2Ж-П+/30х100, ПеН-2Ж-П+/40х40, ПеН-2Ж-П+/40х50, ПеН-2Ж-П+/40х60, ПеН-2Ж-П+/40х70, ПеН-2Ж-П+/40х80, ПеН-2Ж-П+/40х90, ПеН-2Ж-П+/40х100, ПеН-2Ж-П+/50х50, ПеН-2Ж-П+/50х60, ПеН-2Ж-П+/50х70, ПеН-2Ж-П+/50х80, ПеН-2Ж-П+/50х90, ПеН-2Ж-П+/50х100, ПеН-2Ж-П+/60х60, ПеН-2Ж-П+/60х70, ПеН-2Ж-П+/60х80, ПеН-2Ж-П+/60х90, ПеН-2Ж-П+/60х100, ПеН-2Ж-П+/70х70, ПеН-2Ж-П+/70х80, ПеН-2Ж-П+/70х90, ПеН-2Ж-П+/80х80, ПеН-2Ж-П+/80х90. 91. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, розового цвета, с поверхностной плотностью		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-2Р-Э/30х50, ПеН-2Р-Э/30х60, ПеН-2Р-Э/30х70, ПеН-2Р-Э/30х80, ПеН-2Р-Э/30х90, ПеН-2Р-Э/30х100, ПеН-2Р-Э/40х40, ПеН-2Р-Э/40х50, ПеН-2Р-Э/40х60, ПеН-2Р-Э/40х70, ПеН-2Р-Э/40х80, ПеН-2Р-Э/40х90, ПеН-2Р-Э/40х100, ПеН-2Р-Э/50х50, ПеН-2Р-Э/50х60, ПеН-2Р-Э/50х70, ПеН-2Р-Э/50х80, ПеН-2Р-Э/50х90, ПеН-2Р-Э/50х100, ПеН-2Р-Э/60х60, ПеН-2Р-Э/60х70, ПеН-2Р-Э/60х80, ПеН-2Р-Э/60х90, ПеН-2Р-Э/60х100, ПеН-2Р-Э/70х70, ПеН-2Р-Э/70х80, ПеН-2Р-Э/70х90, ПеН-2Р-Э/80х80, ПеН-2Р-Э/80х90. 92. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-2Р-С/30х50, ПеН-2Р-С/30х60, ПеН-2Р-С/30х70, ПеН-2Р-С/30х80, ПеН-2Р-С/30х90, ПеН-2Р-С/30х100, ПеН-2Р-С/40х40, ПеН-2Р-С/40х50, ПеН-2Р-С/40х60, ПеН-2Р-С/40х70, ПеН-2Р-С/40х80, ПеН-2Р-С/40х90, ПеН-2Р-С/40х100, ПеН-2Р-С/50х50, ПеН-2Р-С/50х60, ПеН-2Р-С/50х70, ПеН-2Р-С/50х80, ПеН-2Р-С/50х90, ПеН-2Р-С/50х100, ПеН-2Р-С/60х60, ПеН-2Р-С/60х70, ПеН-2Р-С/60х80, ПеН-2Р-С/60х90, ПеН-2Р-С/60х100, ПеН-2Р-С/70х70, ПеН-2Р-С/70х80, ПеН-2Р-С/70х90, ПеН-2Р-С/80х80, ПеН-2Р-С/80х90. 93. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-2Р-К/30х50, ПеН-2Р-К/30х60, ПеН-2Р-К/30х70, ПеН-2Р-К/30х80, ПеН-2Р-К/30х90, ПеН-2Р-К/30х100, ПеН-2Р-К/40х40, ПеН-2Р-К/40х50, ПеН-2Р-К/40х60, ПеН-2Р-К/40х70, ПеН-2Р-К/40х80, ПеН-2Р-К/40х90, ПеН-2Р-К/40х100, ПеН-2Р-К/50х50, ПеН-2Р-К/50х60, ПеН-2Р-К/50х70, ПеН-2Р-К/50х80, ПеН-2Р-К/50х90, ПеН-2Р-К/50х100, ПеН-2Р-К/60х60, ПеН-2Р-К/60х70, ПеН-2Р-К/60х80, ПеН-2Р-К/60х90, ПеН-2Р-К/60х100, ПеН-2Р-К/70х70, ПеН-2Р-К/70х80, ПеН-2Р-К/70х90, ПеН-2Р-К/80х80, ПеН-2Р-К/80х90. 94. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-2Р-К+/30х50, ПеН-2Р-К+/30х60, ПеН-2Р-К+/30х70, ПеН-2Р-К+/30х80, ПеН-2Р-К+/30х90, ПеН-2Р-К+/30х100, ПеН-2Р-К+/40х40, ПеН-2Р-К+/40х50, ПеН-2Р-К+/40х60, ПеН-2Р-К+/40х70,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	Пен-2Р-К+/40х80, Пен-2Р-К+/40х90, Пен-2Р-К+/40х100, Пен-2Р-К+/50х50, Пен-2Р-К+/50х60, Пен-2Р-К+/50х70, Пен-2Р-К+/50х80, Пен-2Р-К+/50х90, Пен-2Р-К+/50х100, Пен-2Р-К+/60х60, Пен-2Р-К+/60х70, Пен-2Р-К+/60х80, Пен-2Р-К+/60х90, Пен-2Р-К+/60х100, Пен-2Р-К+/70х70, Пен-2Р-К+/70х80, Пен-2Р-К+/70х90, Пен-2Р-К+/80х80, Пен-2Р-К+/80х90. 95. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: Пен-2Р-П/30х50, Пен-2Р-П/30х60, Пен-2Р-П/30х70, Пен-2Р-П/30х80, Пен-2Р-П/30х90, Пен-2Р-П/30х100, Пен-2Р-П/40х40, Пен-2Р-П/40х50, Пен-2Р-П/40х60, Пен-2Р-П/40х70, Пен-2Р-П/40х80, Пен-2Р-П/40х90, Пен-2Р-П/40х100, Пен-2Р-П/50х50, Пен-2Р-П/50х60, Пен-2Р-П/50х70, Пен-2Р-П/50х80, Пен-2Р-П/50х90, Пен-2Р-П/50х100, Пен-2Р-П/60х60, Пен-2Р-П/60х70, Пен-2Р-П/60х80, Пен-2Р-П/60х90, Пен-2Р-П/60х100, Пен-2Р-П/70х70, Пен-2Р-П/70х80, Пен-2Р-П/70х90, Пен-2Р-П/80х80, Пен-2Р-П/80х90. 96. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: Пен-2Р-П+/30х50, Пен-2Р-П+/30х60, Пен-2Р-П+/30х70, Пен-2Р-П+/30х80, Пен-2Р-П+/30х90, Пен-2Р-П+/30х100, Пен-2Р-П+/40х40, Пен-2Р-П+/40х50, Пен-2Р-П+/40х60, Пен-2Р-П+/40х70, Пен-2Р-П+/40х80, Пен-2Р-П+/40х90, Пен-2Р-П+/40х100, Пен-2Р-П+/50х50, Пен-2Р-П+/50х60, Пен-2Р-П+/50х70, Пен-2Р-П+/50х80, Пен-2Р-П+/50х90, Пен-2Р-П+/50х100, Пен-2Р-П+/60х60, Пен-2Р-П+/60х70, Пен-2Р-П+/60х80, Пен-2Р-П+/60х90, Пен-2Р-П+/60х100, Пен-2Р-П+/70х70, Пен-2Р-П+/70х80, Пен-2Р-П+/70х90, Пен-2Р-П+/80х80, Пен-2Р-П+/80х90. 97. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: Пен-23-Э/30х50, Пен-23-Э/30х60, Пен-23-Э/30х70, Пен-23-Э/30х80, Пен-23-Э/30х90, Пен-23-Э/30х100, Пен-23-Э/40х40, Пен-23-Э/40х50, Пен-23-Э/40х60, Пен-23-Э/40х70, Пен-23-Э/40х80, Пен-23-Э/40х90, Пен-23-Э/40х100, Пен-23-Э/50х50, Пен-23-Э/50х60, Пен-23-Э/50х70, Пен-23-Э/50х80, Пен-23-Э/50х90, Пен-23-Э/50х100, Пен-23-Э/60х60, Пен-23-Э/60х70, Пен-23-Э/60х80, Пен-23-Э/60х90,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ПеН-23-Э/60х100, ПеН-23-Э/70х70, ПеН-23-Э/70х80, ПеН-23-Э/70х90, ПеН-23-Э/80х80, ПеН-23-Э/80х90. 98. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-23-С/30х50, ПеН-23-С/30х60, ПеН-23-С/30х70, ПеН-23-С/30х80, ПеН-23-С/30х90, ПеН-23-С/30х100, ПеН-23-С/40х40, ПеН-23-С/40х50, ПеН-23-С/40х60, ПеН-23-С/40х70, ПеН-23-С/40х80, ПеН-23-С/40х90, ПеН-23-С/40х100, ПеН-23-С/50х50, ПеН-23-С/50х60, ПеН-23-С/50х70, ПеН-23-С/50х80, ПеН-23-С/50х90, ПеН-23-С/50х100, ПеН-23-С/60х60, ПеН-23-С/60х70, ПеН-23-С/60х80, ПеН-23-С/60х90, ПеН-23-С/60х100, ПеН-23-С/70х70, ПеН-23-С/70х80, ПеН-23-С/70х90, ПеН-23-С/80х80, ПеН-23-С/80х90. 99. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-23-К/30х50, ПеН-23-К/30х60, ПеН-23-К/30х70, ПеН-23-К/30х80, ПеН-23-К/30х90, ПеН-23-К/30х100, ПеН-23-К/40х40, ПеН-23-К/40х50, ПеН-23-К/40х60, ПеН-23-К/40х70, ПеН-23-К/40х80, ПеН-23-К/40х90, ПеН-23-К/40х100, ПеН-23-К/50х50, ПеН-23-К/50х60, ПеН-23-К/50х70, ПеН-23-К/50х80, ПеН-23-К/50х90, ПеН-23-К/50х100, ПеН-23-К/60х60, ПеН-23-К/60х70, ПеН-23-К/60х80, ПеН-23-К/60х90, ПеН-23-К/60х100, ПеН-23-К/70х70, ПеН-23-К/70х80, ПеН-23-К/70х90, ПеН-23-К/80х80, ПеН-23-К/80х90. 100. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-23-К+/30х50, ПеН-23-К+/30х60, ПеН-23-К+/30х70, ПеН-23-К+/30х80, ПеН-23-К+/30х90, ПеН-23-К+/30х100, ПеН-23-К+/40х40, ПеН-23-К+/40х50, ПеН-23-К+/40х60, ПеН-23-К+/40х70, ПеН-23-К+/40х80, ПеН-23-К+/40х90, ПеН-23-К+/40х100, ПеН-23-К+/50х50, ПеН-23-К+/50х60, ПеН-23-К+/50х70, ПеН-23-К+/50х80, ПеН-23-К+/50х90, ПеН-23-К+/50х100, ПеН-23-К+/60х60, ПеН-23-К+/60х70, ПеН-23-К+/60х80, ПеН-23-К+/60х90, ПеН-23-К+/60х100, ПеН-23-К+/70х70, ПеН-23-К+/70х80, ПеН-23-К+/70х90, ПеН-23-К+/80х80, ПеН-23-К+/80х90. 101. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-23-П/30х50, ПеН-23-П/30х60, ПеН-23-П/30х70, ПеН-23-П/30х80, ПеН-23-П/30х90, ПеН-23-П/30х100, ПеН-23-П/40х40, ПеН-23-П/40х50, ПеН-23-П/40х60, ПеН-23-П/40х70, ПеН-23-П/40х80, ПеН-23-П/40х90, ПеН-23-П/40х100, ПеН-23-П/50х50, ПеН-23-П/50х60, ПеН-23-П/50х70, ПеН-23-П/50х80, ПеН-23-П/50х90, ПеН-23-П/50х100, ПеН-23-П/60х60, ПеН-23-П/60х70, ПеН-23-П/60х80, ПеН-23-П/60х90, ПеН-23-П/60х100, ПеН-23-П/70х70, ПеН-23-П/70х80, ПеН-23-П/70х90, ПеН-23-П/80х80, ПеН-23-П/80х90. 102. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-23-П+/30х50, ПеН-23-П+/30х60, ПеН-23-П+/30х70, ПеН-23-П+/30х80, ПеН-23-П+/30х90, ПеН-23-П+/30х100, ПеН-23-П+/40х40, ПеН-23-П+/40х50, ПеН-23-П+/40х60, ПеН-23-П+/40х70, ПеН-23-П+/40х80, ПеН-23-П+/40х90, ПеН-23-П+/40х100, ПеН-23-П+/50х50, ПеН-23-П+/50х60, ПеН-23-П+/50х70, ПеН-23-П+/50х80, ПеН-23-П+/50х90, ПеН-23-П+/50х100, ПеН-23-П+/60х60, ПеН-23-П+/60х70, ПеН-23-П+/60х80, ПеН-23-П+/60х90, ПеН-23-П+/60х100, ПеН-23-П+/70х70, ПеН-23-П+/70х80, ПеН-23-П+/70х90, ПеН-23-П+/80х80, ПеН-23-П+/80х90. 103. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-2Ф-Э/30х50, ПеН-2Ф-Э/30х60, ПеН-2Ф-Э/30х70, ПеН-2Ф-Э/30х80, ПеН-2Ф-Э/30х90, ПеН-2Ф-Э/30х100, ПеН-2Ф-Э/40х40, ПеН-2Ф-Э/40х50, ПеН-2Ф-Э/40х60, ПеН-2Ф-Э/40х70, ПеН-2Ф-Э/40х80, ПеН-2Ф-Э/40х90, ПеН-2Ф-Э/40х100, ПеН-2Ф-Э/50х50, ПеН-2Ф-Э/50х60, ПеН-2Ф-Э/50х70, ПеН-2Ф-Э/50х80, ПеН-2Ф-Э/50х90, ПеН-2Ф-Э/50х100, ПеН-2Ф-Э/60х60, ПеН-2Ф-Э/60х70, ПеН-2Ф-Э/60х80, ПеН-2Ф-Э/60х90, ПеН-2Ф-Э/60х100, ПеН-2Ф-Э/70х70, ПеН-2Ф-Э/70х80, ПеН-2Ф-Э/70х90, ПеН-2Ф-Э/80х80, ПеН-2Ф-Э/80х90. 104. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-2Ф-С/30х50, ПеН-2Ф-С/30х60, ПеН-2Ф-С/30х70, ПеН-2Ф-С/30х80, ПеН-2Ф-С/30х90, ПеН-2Ф-С/30х100, ПеН-2Ф-С/40х40, ПеН-2Ф-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	С/40х50, ПеН-2Ф-С/40х60, ПеН-2Ф-С/40х70, ПеН-2Ф-С/40х80, ПеН-2Ф-С/40х90, ПеН-2Ф-С/40х100, ПеН-2Ф-С/50х50, ПеН-2Ф-С/50х60, ПеН-2Ф-С/50х70, ПеН-2Ф-С/50х80, ПеН-2Ф-С/50х90, ПеН-2Ф-С/50х100, ПеН-2Ф-С/60х60, ПеН-2Ф-С/60х70, ПеН-2Ф-С/60х80, ПеН-2Ф-С/60х90, ПеН-2Ф-С/60х100, ПеН-2Ф-С/70х70, ПеН-2Ф-С/70х80, ПеН-2Ф-С/70х90, ПеН-2Ф-С/80х80, ПеН-2Ф-С/80х90. 105. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-2Ф-К/30х50, ПеН-2Ф-К/30х60, ПеН-2Ф-К/30х70, ПеН-2Ф-К/30х80, ПеН-2Ф-К/30х90, ПеН-2Ф-К/30х100, ПеН-2Ф-К/40х40, ПеН-2Ф-К/40х50, ПеН-2Ф-К/40х60, ПеН-2Ф-К/40х70, ПеН-2Ф-К/40х80, ПеН-2Ф-К/40х90, ПеН-2Ф-К/40х100, ПеН-2Ф-К/50х50, ПеН-2Ф-К/50х60, ПеН-2Ф-К/50х70, ПеН-2Ф-К/50х80, ПеН-2Ф-К/50х90, ПеН-2Ф-К/50х100, ПеН-2Ф-К/60х60, ПеН-2Ф-К/60х70, ПеН-2Ф-К/60х80, ПеН-2Ф-К/60х90, ПеН-2Ф-К/60х100, ПеН-2Ф-К/70х70, ПеН-2Ф-К/70х80, ПеН-2Ф-К/70х90, ПеН-2Ф-К/80х80, ПеН-2Ф-К/80х90. 106. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-2Ф-К+/30х50, ПеН-2Ф-К+/30х60, ПеН-2Ф-К+/30х70, ПеН-2Ф-К+/30х80, ПеН-2Ф-К+/30х90, ПеН-2Ф-К+/30х100, ПеН-2Ф-К+/40х40, ПеН-2Ф-К+/40х50, ПеН-2Ф-К+/40х60, ПеН-2Ф-К+/40х70, ПеН-2Ф-К+/40х80, ПеН-2Ф-К+/40х90, ПеН-2Ф-К+/40х100, ПеН-2Ф-К+/50х50, ПеН-2Ф-К+/50х60, ПеН-2Ф-К+/50х70, ПеН-2Ф-К+/50х80, ПеН-2Ф-К+/50х90, ПеН-2Ф-К+/50х100, ПеН-2Ф-К+/60х60, ПеН-2Ф-К+/60х70, ПеН-2Ф-К+/60х80, ПеН-2Ф-К+/60х90, ПеН-2Ф-К+/60х100, ПеН-2Ф-К+/70х70, ПеН-2Ф-К+/70х80, ПеН-2Ф-К+/70х90, ПеН-2Ф-К+/80х80, ПеН-2Ф-К+/80х90. 107. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-2Ф-П/30х50, ПеН-2Ф-П/30х60, ПеН-2Ф-П/30х70, ПеН-2Ф-П/30х80, ПеН-2Ф-П/30х90, ПеН-2Ф-П/30х100, ПеН-2Ф-П/40х40, ПеН-2Ф-П/40х50, ПеН-2Ф-П/40х60, ПеН-2Ф-П/40х70, ПеН-2Ф-П/40х80, ПеН-2Ф-П/40х90, ПеН-2Ф-П/40х100, ПеН-2Ф-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	П/50х50, ПеН-2Ф-П/50х60, ПеН-2Ф-П/50х70, ПеН-2Ф-П/50х80, ПеН-2Ф-П/50х90, ПеН-2Ф-П/50х100, ПеН-2Ф-П/60х60, ПеН-2Ф-П/60х70, ПеН-2Ф-П/60х80, ПеН-2Ф-П/60х90, ПеН-2Ф-П/60х100, ПеН-2Ф-П/70х70, ПеН-2Ф-П/70х80, ПеН-2Ф-П/70х90, ПеН-2Ф-П/80х80, ПеН-2Ф-П/80х90. 108. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-2Ф-П+/30х50, ПеН-2Ф-П+/30х60, ПеН-2Ф-П+/30х70, ПеН-2Ф-П+/30х80, ПеН-2Ф-П+/30х90, ПеН-2Ф-П+/30х100, ПеН-2Ф-П+/40х40, ПеН-2Ф-П+/40х50, ПеН-2Ф-П+/40х60, ПеН-2Ф-П+/40х70, ПеН-2Ф-П+/40х80, ПеН-2Ф-П+/40х90, ПеН-2Ф-П+/40х100, ПеН-2Ф-П+/50х50, ПеН-2Ф-П+/50х60, ПеН-2Ф-П+/50х70, ПеН-2Ф-П+/50х80, ПеН-2Ф-П+/50х90, ПеН-2Ф-П+/50х100, ПеН-2Ф-П+/60х60, ПеН-2Ф-П+/60х70, ПеН-2Ф-П+/60х80, ПеН-2Ф-П+/60х90, ПеН-2Ф-П+/60х100, ПеН-2Ф-П+/70х70, ПеН-2Ф-П+/70х80, ПеН-2Ф-П+/70х90, ПеН-2Ф-П+/80х80, ПеН-2Ф-П+/80х90. 109. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа спанлейс, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-3Б-Э/30х50, ПеН-3Б-Э/30х60, ПеН-3Б-Э/30х70, ПеН-3Б-Э/30х80, ПеН-3Б-Э/30х90, ПеН-3Б-Э/30х100, ПеН-3Б-Э/40х40, ПеН-3Б-Э/40х50, ПеН-3Б-Э/40х60, ПеН-3Б-Э/40х70, ПеН-3Б-Э/40х80, ПеН-3Б-Э/40х90, ПеН-3Б-Э/40х100, ПеН-3Б-Э/50х50, ПеН-3Б-Э/50х60, ПеН-3Б-Э/50х70, ПеН-3Б-Э/50х80, ПеН-3Б-Э/50х90, ПеН-3Б-Э/50х100, ПеН-3Б-Э/60х60, ПеН-3Б-Э/60х70, ПеН-3Б-Э/60х80, ПеН-3Б-Э/60х90, ПеН-3Б-Э/60х100, ПеН-3Б-Э/70х70, ПеН-3Б-Э/70х80, ПеН-3Б-Э/70х90, ПеН-3Б-Э/80х80, ПеН-3Б-Э/80х90. 110. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа спанлейс, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-3Б-С/30х50, ПеН-3Б-С/30х60, ПеН-3Б-С/30х70, ПеН-3Б-С/30х80, ПеН-3Б-С/30х90, ПеН-3Б-С/30х100, ПеН-3Б-С/40х40, ПеН-3Б-С/40х50, ПеН-3Б-С/40х60, ПеН-3Б-С/40х70, ПеН-3Б-С/40х80, ПеН-3Б-С/40х90, ПеН-3Б-С/40х100, ПеН-3Б-С/50х50, ПеН-3Б-С/50х60, ПеН-3Б-С/50х70, ПеН-3Б-С/50х80, ПеН-3Б-С/50х90, ПеН-3Б-С/50х100, ПеН-3Б-С/60х60,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ПеН-3Б-С/60х70, ПеН-3Б-С/60х80, ПеН-3Б-С/60х90, ПеН-3Б-С/60х100, ПеН-3Б-С/70х70, ПеН-3Б-С/70х80, ПеН-3Б-С/70х90, ПеН-3Б-С/80х80, ПеН-3Б-С/80х90. 111. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа спанлейс, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-3Б-К/30х50, ПеН-3Б-К/30х60, ПеН-3Б-К/30х70, ПеН-3Б-К/30х80, ПеН-3Б-К/30х90, ПеН-3Б-К/30х100, ПеН-3Б-К/40х40, ПеН-3Б-К/40х50, ПеН-3Б-К/40х60, ПеН-3Б-К/40х70, ПеН-3Б-К/40х80, ПеН-3Б-К/40х90, ПеН-3Б-К/40х100, ПеН-3Б-К/50х50, ПеН-3Б-К/50х60, ПеН-3Б-К/50х70, ПеН-3Б-К/50х80, ПеН-3Б-К/50х90, ПеН-3Б-К/50х100, ПеН-3Б-К/60х60, ПеН-3Б-К/60х70, ПеН-3Б-К/60х80, ПеН-3Б-К/60х90, ПеН-3Б-К/60х100, ПеН-3Б-К/70х70, ПеН-3Б-К/70х80, ПеН-3Б-К/70х90, ПеН-3Б-К/80х80, ПеН-3Б-К/80х90. 112. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа спанлейс, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-3Б-К+/30х50, ПеН-3Б-К+/30х60, ПеН-3Б-К+/30х70, ПеН-3Б-К+/30х80, ПеН-3Б-К+/30х90, ПеН-3Б-К+/30х100, ПеН-3Б-К+/40х40, ПеН-3Б-К+/40х50, ПеН-3Б-К+/40х60, ПеН-3Б-К+/40х70, ПеН-3Б-К+/40х80, ПеН-3Б-К+/40х90, ПеН-3Б-К+/40х100, ПеН-3Б-К+/50х50, ПеН-3Б-К+/50х60, ПеН-3Б-К+/50х70, ПеН-3Б-К+/50х80, ПеН-3Б-К+/50х90, ПеН-3Б-К+/50х100, ПеН-3Б-К+/60х60, ПеН-3Б-К+/60х70, ПеН-3Б-К+/60х80, ПеН-3Б-К+/60х90, ПеН-3Б-К+/60х100, ПеН-3Б-К+/70х70, ПеН-3Б-К+/70х80, ПеН-3Б-К+/70х90, ПеН-3Б-К+/80х80, ПеН-3Б-К+/80х90. 113. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа спанлейс, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-3Б-П/30х50, ПеН-3Б-П/30х60, ПеН-3Б-П/30х70, ПеН-3Б-П/30х80, ПеН-3Б-П/30х90, ПеН-3Б-П/30х100, ПеН-3Б-П/40х40, ПеН-3Б-П/40х50, ПеН-3Б-П/40х60, ПеН-3Б-П/40х70, ПеН-3Б-П/40х80, ПеН-3Б-П/40х90, ПеН-3Б-П/40х100, ПеН-3Б-П/50х50, ПеН-3Б-П/50х60, ПеН-3Б-П/50х70, ПеН-3Б-П/50х80, ПеН-3Б-П/50х90, ПеН-3Б-П/50х100, ПеН-3Б-П/60х60, ПеН-3Б-П/60х70, ПеН-3Б-П/60х80, ПеН-3Б-П/60х90, ПеН-3Б-П/60х100, ПеН-3Б-П/70х70, ПеН-3Б-П/70х80, ПеН-3Б-П/70х90, ПеН-3Б-П/80х80, ПеН-3Б-П/80х90.		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	114. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа спанлейс, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-3Б-П+/30х50, ПеН-3Б-П+/30х60, ПеН-3Б-П+/30х70, ПеН-3Б-П+/30х80, ПеН-3Б-П+/30х90, ПеН-3Б-П+/30х100, ПеН-3Б-П+/40х40, ПеН-3Б-П+/40х50, ПеН-3Б-П+/40х60, ПеН-3Б-П+/40х70, ПеН-3Б-П+/40х80, ПеН-3Б-П+/40х90, ПеН-3Б-П+/40х100, ПеН-3Б-П+/50х50, ПеН-3Б-П+/50х60, ПеН-3Б-П+/50х70, ПеН-3Б-П+/50х80, ПеН-3Б-П+/50х90, ПеН-3Б-П+/50х100, ПеН-3Б-П+/60х60, ПеН-3Б-П+/60х70, ПеН-3Б-П+/60х80, ПеН-3Б-П+/60х90, ПеН-3Б-П+/60х100, ПеН-3Б-П+/70х70, ПеН-3Б-П+/70х80, ПеН-3Б-П+/70х90, ПеН-3Б-П+/80х80, ПеН-3Б-П+/80х90.		
44.	Стекло предметное	МИ.942281.001 СП	не более 10 шт. (при необходимости)
45.	Стекло предметное СП-7102 с необработанными краями	МИ.942281.001 СПН	не более 10 шт. (при необходимости)
46.	Транспортный контейнер для микропрепаратов	МИ.942281.001 ТК	не более 10 шт. (при необходимости)
47.	Пенал для предметных стекол	МИ.942281.001 ПЕН	не более 10 шт. (при необходимости)
48.	Бахилы медицинские артикул ГСТ23Г или ГСТ28Г или ГОПТ30Г или ГОПТ35Г или ГОПТ40Г или ГПР45Г или ГПР50Г или ГОПР60Г или ГОПР80Г	МИ.942281.001 Б1	не более 2 пар (при необходимости)
49.	Бахилы в вариантах исполнения: - низкие из нетканого материала длиной 38,0 см и высотой 15,0 см, или 18,0 см или 20,0 см или - высокие из нетканого материала длиной 38,0 см и высотой 40,0 см или 50,0 см или - низкие полиэтиленовые длиной 38,0 см и высотой 15,0 см или 18,0 см или 20,0 см или - низкие 2-х слойные длиной 38,0 см и высотой 15,0 см или 18,0 см или 20,0 см	МИ.942281.001 Б2	не более 2 пар (при необходимости)
50.	Бахилы в вариантах исполнения: низкие или высокие	МИ.942281.001 Б3	не более 2 пар

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	Бахилы низкие, размер 37-39, спанбонд плотность 25 г/м2 голубой. Высота 18 см, длина следа 38 см. Бахилы низкие, размер 39-41, спанбонд плотность 25 г/м2 голубой. Высота 18 см, длина следа 40 см. Бахилы низкие, размер 39-41, спанбонд плотность 42 г/м2 голубой. Высота 18 см, длина следа 40 см. Бахилы высокие, размер 39-41, спанбонд плотность 25 г/м2 голубой. Высота 56 см, длина следа 40 см. Бахилы высокие, размер 39-41, спанбонд плотность 42 г/м2 голубой. Высота 56 см, длина следа 40 см.		(при необходимости)
51.	Бахилы в вариантах исполнения: хирургические (высокие или низкие) или бахилы на ступню (носки) Бахилы хирургические, высокие, не менее 36 см, на завязках, плотность не менее 20гр./м2. Бахилы хирургические, низкие, не менее 15 см, на резинках, плотность не менее 20гр./м2. Бахилы хирургические, низкие, на ступню, плотность не менее 20гр./м2	МИ.942281.001 Б4	не более 2 пар (при необходимости)
52.	Шапочка «Берет» -диаметр при растянутой резинке 53 см., плотность- 18 г/м2; -диаметр при растянутой резинке 53 см., плотность- 15 г/м2.	МИ.942281.001 Ш1	1 шт. (при необходимости)
53.	Шапочка (берет)	МИ.942281.001 Ш2	1 шт. (при необходимости)
54.	Шапочка «Шарлотта» в вариантах исполнения: - плотность 17 г/м², с двойной резинкой или - плотность 20 г/м², с двойной резинкой или - плотность 25 г/м², с двойной резинкой размерами 19" или 21"или 23"	МИ.942281.001 ШШ	1 шт. (при необходимости)
55.	Маска медицинская из нетканого материала одноразовая	МИ.942281.001 М1	1 шт. (при необходимости)
56.	Маски медицинские трехслойные одноразовые в вариантах исполнения МБ175Б или МС175Б или МС175С	МИ.942281.001 М2	1 шт. (при необходимости)
57.	Маска хирургическая в вариантах исполнения: на завязках или на резинках	МИ.942281.001 М3	1 шт. (при необходимости)
58.	Контейнеры для биопроб полимерные в вариантах исполнения: -Контейнер для биопроб 30 мл полимерный или	МИ.942281.001 КБ	1 шт.

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	-Контейнер для биопроб 30 мл со шпателем полимерный или -Контейнер для биопроб 60 мл полимерный или -Контейнер для биопроб 60 мл со шпателем полимерный или -Контейнер для биопроб 100 мл полимерный или -Контейнер для биопроб 100 мл со шпателем полимерный или -Контейнер для биопроб 120 мл полимерный или -Контейнер для биопроб 120 мл со шпателем полимерный		(при необходимости)
59.	Контейнер одноразовый медицинский полимерный с ложкой и без ложки объемом 20мм, 25мм, 30 мл, 40 мл, 50 мл, 60 мл, 100 мл, 125 мл, 200 мл	МИ.942281.001 КО	1 шт. (при необходимости)
60.	Вкладыш-направление	МИ.942281.001 ВН	1 шт. (при необходимости)
Эксплуатационная документация			
61.	Инструкция по применению	МИ.942281.001 ИП	6 экз. на транспортную тару /или 1 экз. на групповую

Описание медицинского изделия

Детализированное назначение изделий, входящих в состав набора:

Зеркала гинекологические полимерные стерильные по Куско применяются для расширения влагалища и обнажения шейки матки при проведении профилактических осмотров, различных лечебно-диагностических процедур.

Зонды применяются для проведения диагностических или лечебных процедур, для отбора биологического материала для клинических бактериологических, гистологических и/или цитологических исследований.

Перчатки применяются для защиты рук медицинского персонала при проведении профилактических осмотров и различных лечебно-диагностических манипуляций, осмотре пациентов и проведении лабораторных исследований.

Салфетка, пеленка применяются для защиты пациента при проведении профилактических осмотров и различных лечебно-диагностических манипуляций.

Бахилы применяются для использования в качестве чехлов, закрывающих обувь, для поддержания необходимых санитарно-гигиенических норм в медицинских и лабораторных помещениях.

Шапочка применяется для защиты медицинского персонала и пациента в медицинских учреждениях при проведении медицинских процедур для достижения необходимых санитарно-гигиенических норм в отделениях и кабинетах ЛПУ.

Маска применяется для индивидуальной защиты путем создания механический барьер для бактерий, вирусов, микробов, находящихся во вдыхаемом воздухе, для медицинского персонала и пациентов в лечебных учреждениях.

Стекло предметное применяется для проведения микроаналитических исследований в клиничко-диагностических лабораториях.

Транспортный контейнер или пенал применяется для транспортировки микропрепаратов, нанесенных на предметные стекла в рамках контроля качества лабораторных исследований в цитологии, гистологии и бактериоскопии.

Контейнер применяется для сбора, хранения и транспортировки образцов биологических материалов, а также иных твердых или жидких образцов для дальнейшего лабораторного исследования.

Набор поставляется стерильным в герметичной упаковке.

Способ стерилизации – газовый (окисью этилена).

Набор предназначен для одноразового использования.

Масса набора должна быть не более 1 кг, масса каждого изделия, входящего в состав набора, должна быть не более 0,1 кг.

Меры предосторожности:

- Не допускается повторное использование изделий. Повторное использование может привести к увеличению риска возникновения инфекции и перекрестной контаминации, а также к утрате физических свойств изделия, необходимых для его использования по назначению.
- Наборы с истекшим сроком годности должны быть утилизированы.
- Следует соблюдать особую осторожность при применении в случае беременности пациентки.

Указания по эксплуатации

Набор при эксплуатации устойчив к климатическим воздействиям для климатического исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150. Изделия, входящие в состав набора, которые эксплуатируются внутри органов и полостей человека, устойчивы к климатическим воздействиям для климатического исполнения У6 по ГОСТ Р 50444 и воздействиям биологических жидкостей и выделений тканей организма, с которыми они контактируют в процессе эксплуатации.

Наборы должны использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом. Визуальным осмотром определить целостность потребительской упаковки. Убедиться в действии срока годности набора. С соблюдением правил асептики вскрыть потребительскую упаковку. Использовать инструменты в соответствии с предназначением конкретного инструмента. Осмотр должен производиться с соблюдением общепринятых правил асептики.

Эксплуатация комплектующих набора при повреждении упаковки, при наличии неоднородного сварного шва или по истечению срока годности запрещена.

Соблюдать особую осторожность в случае беременности пациентки.

Использовать инструменты непосредственно после вскрытия потребительской упаковки. Применять инструменты только по назначению.

Не допускается повторное применение. Использованные комплектующие набора утилизировать, соблюдая правила утилизации.

Не использовать не по назначению.

Материалы и марки

Изделия, входящие в состав наборов изготовлены из материалов, указанных в таблице 2.

Таблица 2

№	Компонент	Наименование, марка материала	Производитель
1.	Зеркало гинекологическое полимерное стерильное по Куско в вариантах исполнения: тип А1, тип А2, тип А4, тип В1, тип В2, тип В3, тип D1, тип D2, тип G, тип E1 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6883)	Створки зеркала изготовлены из полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003, или из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003. Фиксатор (исполнения тип А, В, D, G) изготовлен из смеси полипропилена марки PP 4445S ТУ 20.16.51-136-05766801-2015 и красителя - концентрата «Баско» ТУ 2243-001-23124265-2000. Створки зеркал (исполнения тип А, В, D, G, E) изготавливаются с металлизированным покрытием из крупки из электролитического рафинированного хрома чистотой 99,9 % Ст марки ЭРХ 99,9-МП (наносится поверх полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003) Для получения антибликового эффекта изготавливаются створки зеркал (исполнения тип А, В, D, G, E) из смеси полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003 и красителя - концентрата «Баско» марки П 0206/10-ПС (цвет оранжевый прозрачный) ТУ 2243-001-23124265-2000	ООО "Медицинские изделия", Россия
2.	Перчатки из пленки полимерной (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10269)	синтетический ПВХ (поливинилхлорид), внутренняя поверхность неопудренная (полиуретановое покрытие) или полимерный материал на основе нитрильного каучука, внутренняя поверхность неопудренная (полиуретановое покрытие)	«ЛЕБОО ХЕЛСКЭА ПРОДАКТС ЛИМИТЕД», Китай

	или Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05130)	Латекс, опудренные модифицированным кукурузным крахмалом	«Топ Глав Сдн Бхд», Малайзия
	или Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные одноразовые, торговой марки Bi-Safe (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6102)	нитриловые.	«ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани», Вьетнам
	или Перчатки латексные медицинские смотровые гладкие опудренные одноразовые, торговой марки Bi-Safe (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6104)	Латекс, опудренные	«ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани», Вьетнам
	или Перчатки латексные медицинские смотровые текстурированные неопудренные одноразовые, торговой марки Bi-Safe (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6105)	латекс	«ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани», Вьетнам
	Перчатки медицинские диагностические одноразовые (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010 08547)	латекс , опудренные	АО "АЗРИ", Россия
3.	Зонд тип А1 универсальный (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Ручка зонда тип А универсального изготовлена из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003, рабочая часть зонда тип А универсального (исполнение А1, А2, А4) – из вязкого флока или флока полиамидного производства SwissFlock AG (Швейцария) или Fratelli Casati s.p.a., Италия (наносится поверх полистирола), закрепленного с помощью клея АФА400 (дисперсия на основе синтетических смол). Рабочая часть (насадка спиральная) зонда тип А универсального (исполнение А4) должна изготовлена из резиновой смеси 52-336/4 ТУ 38.103212-76 (надевается поверх полистирола марки 825).	ООО "Медицинские изделия", Россия
4.	Зонд тип А2 универсальный (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)		
5.	Зонд тип А4 универсальный (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)		

№	Компонент	Наименование, марка материала	Производитель
6.	Зонд тип В1 ложка Фолькмана (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Полистирол марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003	ООО "Медицинские изделия", Россия
7.	Зонд тип В2 ложка Фолькмана (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058 от 23.04.2018 года)		
8.	Зонд тип D1 цитощетка (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Ручка зонда тип D цитощетки - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003. Рабочая часть зонда тип D цитощетки (исполнение D1, D2, D3, D4) - из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной мононити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014. Шарик на конце рабочей части зонда тип D цитощетка (исполнение D2, D4) - из полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003.	ООО "Медицинские изделия", Россия
9.	Зонд тип D2 цитощетка (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)		
10.	Зонд тип D3 цитощетка (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)		
11.	Зонд тип D4 цитощетка (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)		
12.	Зонд тип E1 шпатель гинекологический двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Полистирол марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003	ООО "Медицинские изделия", Россия
13.	Зонд тип E2 шпатель гинекологический двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)		
14.	Зонд тип E3 шпатель гинекологический двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)		
15.	Зонд тип F1 комбинированный (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда тип F комбинированного (исполнение F1, F2, F3, F5) - из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337. Ручка зонда тип F комбинированного, съёмник зонда тип F комбинированного (исполнение F5) - из полистирола	ООО "Медицинские изделия", Россия
16.	Зонд тип F2 комбинированный (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)		
17.	Зонд тип F3 комбинированный (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)		
18.	Зонд тип F5 комбинированный (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)		

№	Компонент	Наименование, марка материала	Производитель
19.	Зонд тип В1-1-Е5-1 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочие части зонда В1-1 и Е5-1 и ручка зонда- из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003	ООО "Медицинские изделия", Россия
20.	Зонд тип D1-E1-2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D1- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, рабочая часть зонда E1-2 и ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	
21.	Зонд тип D1-E3-1 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть D1- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, рабочая часть зонда E3-1 и ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	
22.	Зонд тип D1-F1 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D1- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, рабочая часть зонда F1- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	
23.	Зонд тип D1-F2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D1- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, рабочая часть зонда F2- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	
24.	Зонд тип D1-F3 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D1- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, рабочая часть зонда F3- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	
25.	Зонд тип D2-F1 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D2- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, шарик на конце рабочей части зонда D2 - из полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003, рабочая часть зонда F1- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	
26.	Зонд тип D2-F2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D2- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, шарик на конце рабочей части зонда D2 - из полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003, рабочая часть зонда F2- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	

№	Компонент	Наименование, марка материала	Производитель
27.	Зонд тип D2-F3 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D2- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, шарик на конце рабочей части зонда D2 - из полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003, рабочая часть зонда F3- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	ООО "Медицинские изделия", Россия
28.	Зонд тип D3-F1 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D3- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, рабочая часть зонда F1- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	
29.	Зонд тип D3-F2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D3- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, рабочая часть зонда F2- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	
30.	Зонд тип D3-F3 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D3- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, рабочая часть зонда F3- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	
31.	Зонд тип D4-F1 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D4- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, шарик на конце рабочей части зонда D4 - из полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003, рабочая часть зонда F1- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	
32.	Зонд тип D4-F2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D4- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, шарик на конце рабочей части зонда D4 - из полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003, рабочая часть зонда F2- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	

№	Компонент	Наименование, марка материала	Производитель
33.	Зонд тип D4-F3 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D4- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, шарик на конце рабочей части зонда D4 - из полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003, рабочая часть зонда F3- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	ООО "Медицинские изделия", Россия
34.	Зонд тип D1-H2-2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D1- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, рабочая часть зонда H2-2 тампон - из пенополиуретана марки ППУ ЭО-130 ТУ 6-55-53-91, закрепленного на ручке зонда с помощью клея АФА400 (дисперсия на основе синтетических смол), ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	ООО "Медицинские изделия", Россия
35.	Зонд тип D2-H2-2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D2- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, шарик на конце рабочей части зонда D2 - из полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003, рабочая часть зонда H2-2 тампон - из пенополиуретана марки ППУ ЭО-130 ТУ 6-55-53-91, закрепленного на ручке зонда с помощью клея АФА400 (дисперсия на основе синтетических смол), ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	ООО "Медицинские изделия", Россия
36.	Зонд тип D3-H2-2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D3- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, рабочая часть зонда H2-2 тампон - из пенополиуретана марки ППУ ЭО-130 ТУ 6-55-53-91, закрепленного на ручке зонда с помощью клея АФА400 (дисперсия на основе синтетических смол), ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	ООО "Медицинские изделия", Россия
37.	Зонд тип D4-H2-2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D4- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, шарик на конце рабочей части зонда D4 - из полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003, рабочая часть зонда H2-2 тампон - из пенополиуретана марки ППУ ЭО-130 ТУ 6-55-53-91, закрепленного на ручке зонда с помощью клея АФА400 (дисперсия на основе синтетических смол), ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	ООО "Медицинские изделия", Россия

№	Компонент	Наименование, марка материала	Производитель
38.	Зонд тип F1-H2-2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда F1- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, рабочая часть зонда тип H2-2 тампон - из пенополиуретана марки ППУ ЭО-130 ТУ 6-55-53-91, закрепленного на ручке зонда с помощью клея АФА400 (дисперсия на основе синтетических смол), ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	ООО "Медицинские изделия", Россия
39.	Зонд тип F2-H2-2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда F2- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, рабочая часть зонда тип H2-2 тампон - из пенополиуретана марки ППУ ЭО-130 ТУ 6-55-53-91, закрепленного на ручке зонда с помощью клея АФА400 (дисперсия на основе синтетических смол), ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	ООО "Медицинские изделия", Россия
40.	Зонд тип F3-H2-2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда F3- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, рабочая часть зонда тип H2-2 тампон - из пенополиуретана марки ППУ ЭО-130 ТУ 6-55-53-91, закрепленного на ручке зонда с помощью клея АФА400 (дисперсия на основе синтетических смол), ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	ООО "Медицинские изделия", Россия
41.	Салфетка (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09345)	спанбонд	ООО "Гекса-нетканые материалы", Россия
42.	Пленки впитывающие, одноразовые «Clione» для взрослых и детей (Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1714)	1 слой - материал нетканый «Спанбонд», состав полипропилен – 100%, с гидрофильной добавкой 2 слой – бумага из древесной целлюлозы, состав- древесная первичная целлюлоза – 100% 3 слой – целлюлоза распушенная, состав- древесная первичная целлюлоза – 100% 4 слой супер абсорбент, состав – полиарилат натрия 100% 5 слой – бумага из древесной целлюлозы, состав- древесная первичная целлюлоза – 100% 6 слой – полиэтиленовая пленка, состав – полиэтилен высокого давления – 100%	ООО "КЛЕОН", Россия
43.	Пленки медицинские одноразовые по ТУ 13.95.10-020-74582615-2017 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6949)	Нетканые материалы типов СМС, СС и В Цвет пеленок изготовленных из материалов типов СС, СМС и В -белый (натуральный) или голубой или желтый или розовый или зеленый или фиолетовый. Цвет пеленок изготовленных из материала типа спанлейс -белый (натуральный).	ООО «Завод Эластик», Россия
44.	Стекло предметное (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10371)	стекло	"Янченг Хуида Медикл Инструментс Ко., Лтд.", Китай
45.	Стекло предметное СП-7102 с необработанными краями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2981)	силикатное стекло	ООО "МиниЛаб" Россия

№	Компонент	Наименование, марка материала	Производитель
46.	Транспортный контейнер для микропрепаратов (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05515)	полипропилен	ДЕЛЬТАЛАБ С.Л., Испания
47.	Пенал для предметных стекол (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07661)	полипропилен	"Лп Итальяна С.п.А.", Италия
48.	Бахилы медицинские артикул ГСТ23Г или ГСТ28Г или ГОПТ30Г или ГОПТ35Г или ГОПТ40Г или ГПР45Г или ГПР50Г или ГОПР60Г или ГОПР80Г (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5146)	полиэтилен низкого давления, одинарная витая оплетенная резинка	ООО "Парамедикум" Россия
49.	Бахилы в вариантах исполнения: - низкие из нетканого материала длиной 38,0 см и высотой 15,0 см, или 18,0 см или 20,0 см или - высокие из нетканого материала длиной 38,0 см и высотой 40,0 см или 50,0 см или	нетканый материал СС, СМС, резинка	ООО «НПК «САНИТАС», Россия
	- низкие полиэтиленовые длиной 38,0 см и высотой 15,0 см или 18,0 см или 20,0 см или	ПЭВД, ПЭНД, ПЭВД/ ПЭНД, резинка	
	- низкие 2-х слойные длиной 38,0 см и высотой 15,0 см или 18,0 см или 20,0 см (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4809)	ПЭВД/ ПЭНД, резинка СС или СМС/ ПЭВД или ПЭНД, резинка	
50.	Бахилы в вариантах исполнения низкие или высокие (Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06234)	полипропиленовый нетканый материал спанбонд, резинка	ООО «Гекса-нетканые материалы», Россия
51.	Бахилы в вариантах исполнения хирургические (высокие или низкие) или бахилы на ступню (носки) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/823)	многослойный нетканый материал СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд), резинка	ЗАО «ЗДРАВМЕДТЕХ-П», Россия
52.	Шапочка «Берет» (Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06234)	полипропиленовый нетканый материал, резинка	ООО «Гекса - нетканые материалы», Россия
53.	Шапочка (берет) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/823)	многослойный нетканый материал СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд), резинка	ЗАО «ЗДРАВМЕДТЕХ-П», Россия

№	Компонент	Наименование, марка материала	Производитель
54.	Шапочка «Шарлотта» в вариантах исполнения: - плотность 17 г/м ² , с двойной резинкой или - плотность 20 г/м ² , с двойной резинкой или - плотность 25 г/м ² , с двойной резинкой (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4829)	нетканый материал, резинка	ООО «НПК»САНИТАС» Россия
55.	Маска медицинская из нетканого материала одноразовая (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08512)	нетканый материал, гибкий носовой фиксатор, ушные резинки	ООО "МАСКА", Россия
56.	Маски медицинские трехслойные одноразовые в вариантах исполнения МБ175Б или МС175Б или МС175С (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5736)	нетканый материал, гибкий носовой фиксатор, резинки	ООО «КЛЕВЕР-ПРО», Россия
57.	Маска хирургическая в вариантах исполнения: на завязках или на резинках (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/823)	полипропиленовый нетканый термоскрепленный материал, фильтрующий элемент (промежуточный слой) - мельтблаун (нетканый материал, полученный из полипропиленовых микроволокон, носовой фиксатор, резинка	ЗАО «ЗДРАВМЕДТЕХ-П», Россия
58.	Контейнеры для биопроб полимерные в вариантах исполнения: -Контейнер для биопроб 30 мл полимерный или -Контейнер для биопроб 30 мл со шпателем полимерный или -Контейнер для биопроб 60 мл полимерный или -Контейнер для биопроб 60 мл со шпателем полимерный или -Контейнер для биопроб 100 мл полимерный или -Контейнер для биопроб 100 мл со шпателем полимерный или -Контейнер для биопроб 120 мл полимерный или -Контейнер для биопроб 120 мл со шпателем полимерный, (Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1706)	Корпус– из полипропилена марки РР 4445S по ТУ 20.16.51-136-05766801-2015 или полипропилена марки РР 4445Т по ТУ 20.16.51-136-05766801-2015. Крышки контейнеров (30,60,100,120 мл) и шпатель контейнера (30 мл) – из полиэтилена низкого давления марки ПЭНТ22-12 по ТУ 2243-176-00203335-2007 окрашенного красителем - концентрат «Баско» марки П1105/02-ПЭ по ТУ 2243-001-23124265-2000, производства ООО НПФ «Барс-2», Россия. Шпатель контейнера 60 мл, 100 мл, 120 мл – из полистирола марки 825 по ТУ 2214-126-05766801-2003 и красителя - концентрат «Баско» марки П3010/01-ПС по ТУ 2243-001-23124265-2000	ООО «Полимерные изделия», Россия
59.	Контейнер одноразовый медицинский полимерный (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07338)	полипропилен	ЗАО "Перинт", Россия
60.	Вкладыш-направление	Типографская краска марки RISO, серии EZ. Бумага по СТО 00279404-001-2013 Бумага по СТО 00253497-002-2012	«RISO KAGAKU CORPORATION», Япония. АО «Монди СЛПК», Россия. ЗАО «Интернешенл Пейпер», Россия.

Способ применения

Зеркало гинекологическое полимерное стерильное по Куско

- соблюдая правила асептики, вскрыть упаковку с зеркалом и извлечь зеркало;
- проверить целостность зеркала, надежность соединения створок между собой и надежность крепления фиксатора методом визуального осмотра;
- створки зеркала перед применением сомкнуть;
- ввести зеркало;
- створки зеркала развести на требуемый угол путем приложения усилий на ручку нижней и верхней створок, смыкая их;
- зафиксировать створки зеркала в нужном положении;
- провести манипуляции;
- по окончании манипуляции вывести створки зеркала из фиксирующего положения тем самым размыкая ручки нижней и верхней створок;
- извлечь зеркало.

Зеркало гинекологическое полимерное стерильное по Куско тип Е1:

- соблюдая правила асептики, вскрыть упаковку с зеркалом и извлечь зеркало;
- проверить целостность зеркала, надежность соединения створок между собой методом визуального осмотра;
- створки зеркала перед применением сомкнуть;
- ввести зеркало;
- приложить усилие к рукоятке верхней створки приподнимая ее при этом фиксирующие зубья поочередно проходят зацепления за кромки в рукоятке нижней створки.
- провести манипуляции;
- по окончании манипуляции вывести створки зеркала из фиксирующего положения путем приложения усилия к рукоятке верхней створки опуская ее при этом фиксирующие зубья выходят из зацепления за кромки в рукоятке нижней створки;
- извлечь зеркало.

Зонд тип А универсальный:

- извлеките зонд из упаковки;
 - погрузите зонд в уретру или цервикальный канал;
 - медленно поверните зонд в обе стороны;
 - извлеките зонд и перенесите материал с поверхности зонда на предметное стекло;
 - при необходимости отправки материала в лабораторию, отломите конец зонда и поместите его в транспортную пробирку, расположенную в полый ручке зонда
- Покрывание зонда обеспечивает качественное взятие биологического материала.

Зонд тип В ложка Фолькмана:

Взятие материала для исследования из уретры:

- при наличии большого количества выделений наружное отверстие уретры должно быть очищено с помощью марлевого тампона;
- при отсутствии свободных выделений может быть проведен легкий массаж уретры, выполняемый врачом;
- извлеките зонд из упаковки;
- после введения зонда в уретру на 1-2 см необходимо плоскость «глазка» петли двигать к наружному отверстию, слегка нажимая на заднюю и боковые стенки уретры;
- для микроскопического и иммунофлюоресцентного исследования после получения клинического материала петля накладывается на поверхность стекла и передвигается по нему несколько раз с легким нажатием. Петля должна оставить на стекле тонкую полоску клинического материала;

- для культурального исследования и исследования методом ПЦР материал помещается в соответствующие пробирки с транспортной средой.

Взятие материала для исследования из цервикального канала:

- необходимо тщательно очистить наружное отверстие цервикального канала при помощи марлевого тампона от вагинальных выделений для предотвращения возможной контаминации;
- извлеките зонд из упаковки;
- после введения зонда в шейный канал на 1-2 см его вращают несколько раз;
- для микроскопического и иммунофлюоресцентного исследования клинический материал должен быть перенесен с тампона на стекло как можно более тонким слоем;
- для культурального исследования и исследования методом ПЦР материал помещается в соответствующие пробирки с транспортной средой;
- цервикальные мазки не берутся у девочек препубертатного возраста. При подозрении на ИППП в этом возрасте мазки берутся из преддверия влагалища;
- у женщин после гистерэктомии мазки на *C.trachomatis* и *M.gonorrhoeae* берутся из уретры, вагины и ануса;
- для микроскопического исследования вагинального отделяемого материал берется (также с помощью зеркала) зондом с заднего свода влагалища и тонким слоем распределяется на предметном стекле (для исследования на *Trichomonas vaginalis*).

Зонд тип D цитощетка:

- извлеките зонд из упаковки;
- введите зонд в цервикальный канал;
- обеспечьте соприкосновение цервикального канала с ворсистой поверхностью инструмента и поверните его по и против часовой стрелки для сбора материала;
- извлеките зонд;
- переместите биологический материал на предметное стекло, зафиксируйте отпечаток.

Зонд тип Е шпатель гинекологический двухсторонний:

Концы рабочих поверхностей инструмента имеют различную форму и размер, что позволяет проводить качественный забор материала с поверхности слизистой оболочки органа.

Чтобы получить соскоб с поверхности органа, делается полный оборот шпателя с легким надавливанием. Затем материал со шпателя наносится на обезжиренное стекло, высушивается на воздухе или фиксируется при помощи специального аэрозоля.

Зонд тип F комбинированный:

- извлеките зонд из упаковки;
- введите зонд в цервикальный канал;
- обеспечьте соприкосновение цервикального канала с ворсистой поверхностью инструмента и поверните его по и против часовой стрелки для сбора материала;
- извлеките зонд;
- переместите биологический материал на предметное стекло, зафиксируйте отпечаток.

Примечание:

При необходимости направить материал в лабораторию отсоедините рабочую часть зонда с биологическим материалом (исполнение F5) и поместите ее в контейнер для транспортировки в лабораторию.

Зонд двухсторонний:

Зонды двусторонние представляют собой зонд с рабочими частями 2х типов зондов согласно обозначению и применяются в соответствии с указаниями, соответствующими каждой рабочей части.

Зонд тип H2 тампон

Взятие материала для приготовления мазка – отпечатка:

- извлеките зонд из упаковки,
- отберите на него необходимое количество биологического материала,
- собранный на тампоне материал перенесите на предметное стекло,
- отобранную пробу немедленно доставьте в лабораторию.

Перчатки

Перед надеванием нестерильных или стерильных перчаток проводится гигиеническая обработка рук или обработка рук. Перчатки надевают только после полного высыхания антисептика на коже рук.

Вначале перчатка надевается на доминантную (правую) руку;

- большим и указательным пальцами левой руки захватить край вывернутой наизнанку манжеты правой перчатки и надеть ее на правую руку, не касаясь наружной стерильной поверхности перчатки. Манжета остаётся вывернутой;

- пальцы правой руки, на которые уже надета перчатка, подвести под отворот манжеты левой перчатки и надеть ее на левую руку, не касаясь кожи и изнаночной стороны манжеты;

- расправить манжету левой перчатки;

- развернуть вывернутый край манжеты правой перчатки аналогичными круговыми движениями.

После снятия перчаток проводится гигиеническая обработка кожи рук антисептиками.

Салфетка, Пеленка

Перед проведением профилактических осмотров и различных лечебно-диагностических манипуляций салфетку, пеленку, необходимо расположить на гинекологическом кресле при соблюдении правил асептики.

Стекло предметное

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Стекло не должно подвергаться ударам в процессе эксплуатации.

Транспортный контейнер для микропрепаратов, пенал для предметных стекол

Выбор транспортного контейнера для микропрепаратов определяется количеством стекол, подлежащих транспортировке. Поместить стекло(а) в транспортный контейнер или пенал, плотно закрыть крышку, надписать контейнер маркером и отправить выбранным видом транспорта.

Бахилы

Одеть бахилы на обувь пациента, вымыть руки.

Шапочка

Шапочку в виде гофрированной полоски, сложенной зигзагообразно, расправить и одеть на голову, волосы убрать под шапочку.

Маска медицинская

Одеть маску цветной стороной и креплениями ушных петель (резинок) или завязок наружу. Убедиться в удобном прилегании фиксатора для носа на переносице. Расправьте маску внизу на подбородке. Закрепите петли (резинки) за ушами или завяжите завязки, если маска поставляется с завязками. Убедитесь, что маска плотно прилегает к лицу для обеспечения личной безопасности.

Контейнер

Непосредственно перед отбором пробы вскрыть потребительскую упаковку, открыть крышку, наполнить контейнер биоматериалом, плотно закрыть крышку.

Условия эксплуатации

Набор при эксплуатации должен быть устойчив к климатическим воздействиям для климатического исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150. Изделия, входящие в состав набора, которые эксплуатируются внутри органов и полостей человека и должны быть устойчивы к климатическим воздействиям для климатического исполнения У6 по ГОСТ Р 50444 и воздействиям биологических жидкостей и выделений тканей организма, с которыми они контактируют в процессе эксплуатации.

Утилизация

Набор должен утилизироваться согласно правилам, установленным СанПиН 2.1.7.2790.

Использованный набор относится к отходам класса Б согласно СанПиН 2.1.7.2790.

Набор, неиспользованный по причине окончания срока годности или повреждения упаковки, относится к классу А согласно СанПиН 2.1.7.2790 и утилизируется как бытовые отходы.

Внимание! Набор стерилен, нетоксичен.

Внимание! Набор выпускается стерильным и предназначен для одноразового использования.

Метод стерилизации

Газовый (оксидом этилена).

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие наборов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и правил эксплуатации.

Гарантийный срок сохранения стерильности набора – 5 (пять) лет.

Условия хранения и транспортирования

Транспортировка должна производиться в закрытых транспортных средствах в соответствии с действующими на транспорте каждого вида правилами, утвержденными в установленном порядке. Условия транспортирования – по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Наборы должны храниться в групповой или транспортной упаковке по условиям хранения 1(Л) по ГОСТ 15150 при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных

приборов. Избегать воздействия прямых солнечных лучей и значительных колебаний температуры во время хранения.

После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия должны быть выдержаны в транспортной таре в условиях хранения не менее 12 часов до использования.

Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия

Набор имеет полностью законченную конструкцию и не требует в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту.

Требования к охране окружающей среды

Набор при использовании, транспортировании и хранении не оказывают негативного воздействия на человека и окружающую среду.

Риски применения медицинского изделия

В рамках процедуры производителем были определены опасности, связанные с использованием, конструкцией и процедурами. Опасности с неприемлемым уровнем риска были сокращены до приемлемого уровня путем изменения конструкции, проведения испытаний и других взаимоприемлемых мер. На основании анализа были выявлены и сокращены до приемлемых уровней все установленные и предвидимые заранее опасности и сопутствующие риски.

Сведения о рекламациях

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – производителю ООО «Медицинские изделия» по адресу: 420061, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д.39, оф. 102.

Тел.: (843) 279-69-03, e-mail: info@medizdelie.ru.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские изделия» (ООО «Медицинские изделия»).

Юридический адрес: 420061, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д.39, оф. 102. Тел.: (843) 279-69-03, e-mail: info@medizdelie.ru.

Место производства медицинского изделия

140500, Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, пр. Строителей, вл.7, строен. 3.

Перечень применяемых производителем (изготовителем) медицинского изделия национальных стандартов

- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

- ГОСТ ISO 11607-1-2018 «Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам».
- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Общие требования».
- ГОСТ ISO 10993-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий».
- ГОСТ 31214-2003 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, предоставляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность».
- ГОСТ 31814-2012 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия».
- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Инструкция по применению предоставляется потребителю в сокращенном виде на фактический вариант исполнения набора. Ознакомление с полной версией инструкции на набор, возможно связавшись с производителем Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские изделия» (ООО «Медицинские изделия»).
Юридический адрес: 420061, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д.39, оф. 102. Тел.: (843) 279-69-03, e-mail: info@medizdelie.ru.

Символы, наносимые на маркировку:

	Стерилизация оксидом этилена		Не допускать воздействия солнечного света
	Одноразовое использование		Беречь от влаги
	Не использовать при повреждении упаковки		Хрупкое, обращаться осторожно
	Температурный диапазон		Верх
	Диапазон влажности		Пределы температуры
	Обратитесь к инструкции по применению		Знак соответствия при декларировании
	Знак соответствия при добровольной сертификации		

скреплено печатью
61 (шестьдесят один) листа (ов)
Генеральный директор
ООО «Медицинские изделия»
«Медицинские изделия» Галимов Д.Ф.

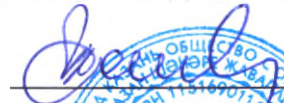
Генеральный директор
ООО «Медицинские изделия»

Галимов Д.Ф.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Медицинские изделия»

 Галимов Д.Ф.

« 01 »  2021 г.

Инструкция по применению

Набор гинекологический смотровой «Юнисет»
по ТУ 32.50.13-003-98349125-2018 в составе

МИ.942281.001 ИП

Версия № 4

Наименование медицинского изделия

Набор гинекологический смотровой «Юнисет» по ТУ 32.50.13-003-98349125-2018 в составе (далее по тексту – набор) исполнения согласно Таблице 1.

Область применения: медицинские, лечебно-профилактические учреждения, в том числе и амбулаторные, специализирующиеся на акушерстве и гинекологии, дерматовенерологии, урологии.

Данное изделие должно использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом.

Наборы выпускаются стерильными и предназначены для одноразового использования.

Назначение

Набор гинекологический смотровой «Юнисет» по ТУ 32.50.13-003-98349125-2018 в составе предназначен для проведения профилактических осмотров и различных лечебных процедур, а именно для проведения акушерско-гинекологических осмотров и забора материала для бактериологических, цитологических и других исследований в гинекологических консультациях, гинекологических отделениях, родильных домах, кожновенерологических диспансерах и других медицинских учреждениях.

Показания для применения медицинского изделия

Осмотр слизистой влагалища и шейки матки, отбор биологического материала для проведения акушерско-гинекологических осмотров и забора материала для бактериологических, цитологических, уретральных и других исследований.

Противопоказания (меры предосторожности) при применении медицинского изделия

- Нарушение целостности стерильной упаковки.
- Истечение срока годности.
- Наличие повреждения изделий в наборе, отсутствие надежности соединения створок зеркала между собой и надежности крепления фиксатора.
- Вагинальный спазм (вагинизм).
- Гистеросальпингоскопия.

Побочные эффекты

При надлежащем использовании набора побочных эффектов не наблюдается.

Комплектность поставки

Комплект поставки набора должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	Набор гинекологический смотровой «Юнисет» в составе:	МИ.942281.001	1 набор
1.	Зеркало гинекологическое полимерное стерильное по Куско в вариантах исполнения: - тип А1 (размерами XS, S, M, L, XL) - тип А2 (размерами XS, S, M, L, XL) - тип А4 (размерами XS, S, M, L, XL) - тип В1 (размерами XS, S, M, L, XL) - тип В2 (размерами XS, S, M, L, XL) - тип В3 (размерами XS, S, M, L, XL) - тип D1 (размерами XS, S, M, L) - тип D2 (размерами S, M, L) - тип G (размерами S, M, L) - тип E1 (размерами S, M, L)	МИ.942281.001 ЗГ	1 шт.
2.	Перчатки из пленки полимерной типоразмера: XS, S, M, L, XL	МИ.942281.001 ПП	1 пара
	или Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса типоразмера: XS, S, M, L, XL	МИ.942281.001 ПД	
	или Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные одноразовые, торговой марки Bi-Safe типоразмера сверхмалые (XS), маленькие (S), средние (M), большие (L), сверхбольшие (XL)	МИ.942281.001 ПНС	
	или Перчатки латексные медицинские смотровые гладкие опудренные одноразовые, торговой марки Bi-Safe типоразмера сверхмалые (XS), маленькие (S), средние (M), большие (L), сверхбольшие (XL)	МИ.942281.001 ПЛСО	
	или Перчатки латексные медицинские смотровые текстурированные неопудренные одноразовые, торговой марки Bi-Safe типоразмера сверхмалые (XS), маленькие (S), средние (M), большие (L), сверхбольшие (XL), сверхмалые (XS) с повышенной прочностью, маленькие (S) с повышенной прочностью, сред- ние (M) с повышенной прочностью, большие (L) с повышенной прочностью, сверхбольшие (XL) с повышенной прочностью	МИ.942281.001 ПЛСН	
	Перчатки медицинские диагностические одноразовые, размеры S, M, L, XL	МИ.942281.001 ПД	
3.	Зонд тип А1 универсальный	МИ.942281.001 3А1	не более 2 шт. (при необходим ости)
4.	Зонд тип А2 универсальный	МИ.942281.001 3А2	не более 2 шт.

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
			(при необходим ости)
5.	Зонд тип А4 универсальный	МИ.942281.001 3А4	не более 2 шт. (при необходим ости)
6.	Зонд тип В1 ложка Фолькмана	МИ.942281.001 3В1	не более 2 шт. (при необходим ости)
7.	Зонд тип В2 ложка Фолькмана	МИ.942281.001 3В2	не более 2 шт. (при необходим ости)
8.	Зонд тип D1 цитощетка	МИ.942281.001 3D1	не более 2 шт. (при необходим ости)
9.	Зонд тип D2 цитощетка	МИ.942281.001 3D2	не более 2 шт. (при необходим ости)
10.	Зонд тип D3 цитощетка	МИ.942281.001 3D3	не более 2 шт. (при необходим ости)
11.	Зонд тип D4 цитощетка	МИ.942281.001 3D4	не более 2 шт. (при необходим ости)
12.	Зонд тип Е1 шпатель гинекологический двухсторонний	МИ.942281.001 3Е1	не более 2 шт. (при необходим ости)
13.	Зонд тип Е2 шпатель гинекологический двухсторонний	МИ.942281.001 3Е2	не более 2 шт. (при необходим ости)
14.	Зонд тип Е3 шпатель гинекологический двухсторонний	МИ.942281.001 3Е3	не более 2 шт. (при необходим ости)

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
15.	Зонд тип F1 комбинированный	МИ.942281.001 3F1	не более 2 шт. (при необходим ости)
16.	Зонд тип F2 комбинированный	МИ.942281.001 3F2	не более 2 шт. (при необходим ости)
17.	Зонд тип F3 комбинированный	МИ.942281.001 3F3	не более 2 шт. (при необходим ости)
18.	Зонд тип F5 комбинированный	МИ.942281.001 3F5	не более 2 шт. (при необходим ости)
19.	Зонд тип В1-1-Е5-1 двухсторонний	МИ.942281.001 3В1- 1-Е5-1	не более 2 шт. (при необходим ости)
20.	Зонд тип D1-Е1-2 двухсторонний	МИ.942281.001 3D1- Е1-2	не более 2 шт. (при необходим ости)
21.	Зонд тип D1-Е3-1 двухсторонний	МИ.942281.001 3D1- Е3-1	не более 2 шт. (при необходим ости)
22.	Зонд тип D1-F1 двухсторонний	МИ.942281.001 3D1- F1	не более 2 шт. (при необходим ости)
23.	Зонд тип D1-F2 двухсторонний	МИ.942281.001 3D1- F2	не более 2 шт. (при необходим ости)
24.	Зонд тип D1-F3 двухсторонний	МИ.942281.001 3D1- F3	не более 2 шт. (при необходим ости)
25.	Зонд тип D2-F1 двухсторонний	МИ.942281.001 3D2- F1	не более 2 шт.

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
			(при необходим ости)
26.	Зонд тип D2-F2 двухсторонний	МИ.942281.001 3D2- F2	не более 2 шт. (при необходим ости)
27.	Зонд тип D2-F3 двухсторонний	МИ.942281.001 3D2- F3	не более 2 шт. (при необходим ости)
28.	Зонд тип D3-F1 двухсторонний	МИ.942281.001 3D3- F1	не более 2 шт. (при необходим ости)
29.	Зонд тип D3-F2 двухсторонний	МИ.942281.001 3D3- F2	не более 2 шт. (при необходим ости)
30.	Зонд тип D3-F3 двухсторонний	МИ.942281.001 3D3- F3	не более 2 шт. (при необходим ости)
31.	Зонд тип D4-F1 двухсторонний	МИ.942281.001 3D4- F1	не более 2 шт. (при необходим ости)
32.	Зонд тип D4-F2 двухсторонний	МИ.942281.001 3D4- F2	не более 2 шт. (при необходим ости)
33.	Зонд тип D4-F3 двухсторонний	МИ.942281.001 3D4- F3	не более 2 шт. (при необходим ости)
34.	Зонд тип D1-H2-2 двухсторонний	МИ.942281.001 3D1- H2-2	не более 2 шт. (при необходим ости)
35.	Зонд тип D2-H2-2 двухсторонний	МИ.942281.001 3D2- H2-2	не более 2 шт. (при необходим ости)

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
36.	Зонд тип D3-H2-2 двухсторонний	МИ.942281.001 3D3- H2-2	не более 2 шт. (при необходим ости)
37.	Зонд тип D4-H2-2 двухсторонний	МИ.942281.001 3D4- H2-2	не более 2 шт. (при необходим ости)
38.	Зонд тип F1-H2-2 двухсторонний	МИ.942281.001 3F1- H2-2	не более 2 шт. (при необходим ости)
39.	Зонд тип F2-H2-2 двухсторонний	МИ.942281.001 3F2- H2-2	не более 2 шт. (при необходим ости)
40.	Зонд тип F3-H2-2 двухсторонний	МИ.942281.001 3F3- H2-2	не более 2 шт. (при необходим ости)
41.	Салфетка - 80*70см, спанбонд пл.20 г/м2, голубой, - 45*45см, спанбонд пл.25 г/м2, голубой, 80*70см, - спанбонд пл.25 г/м2, голубой, - 45*45см, спанбонд пл.42 г/м2, голубой, - 80*70см, спанбонд пл.42 г/м2, голубой	МИ.942281.001 С	1 шт. (при необходим ости)
42.	Пленки впитывающие, одноразовые «Clione» для взрослых и детей в вариантах исполнения: 20х20 см, 20х30 см, 20х40 см, 25х25 см, 25х30 см, 25х40 см, 30х30 см, 30х40 см, 30х50 см, 30х60, см, 30х70 см, 40х40 см, 40х50 см, 40х60 см, 40х70 см, 40х80 см, 45х45 см, 45х50 см, 45х60 см, 45х70 см, 45х80 см, 45х90 см, 50х50 см, 50х60 см, 50х65 см, 50х70 см, 50х75 см, 50х80 см, 50х85 см, 50х90 см, 50х95 см, 50х100 см, 60х60 см, 60х65 см, 60х70 см, 60х75 см, 60х80 см, 60х85 см, 60х90 см, 60х95 см, 60х100 см, 60х105 см, 60х110 см, 60х120 см, 60х130 см, 60х140 см, 60х150 см, 60х160 см, 60х170 см, 60х180 см, 60х190 см, 60х200 см, 60х300 см, 70х70 см, 70х80 см, 70х90 см, 70х100 см, 70х110 см, 70х120 см, 70х130 см, 70х140 см, 70х150 см, 70х160 см, 70х170 см, 70х180 см, 70х190 см, 70х200 см, 80х80 см, 80х90 см, 80х100 см, 80х120 см, 80х140 см, 80х160 см, 80х180 см, 80х200 см, 90х90 см, 90х100 см, 90х120 см, 90х140 см, 90х160 см, 90х170 см, 90х180 см,	МИ.942281.001 П1	1 шт. (при необходим ости)

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	90х200 см, 100х100 см, 100х120 см, 100х140 см, 100х160 см, 100х180 см, 100х200 см, 100х250 см, 140х100 см, 140х110 см, 140х120 см, 140х140 см, 140х200 см, 140х250 см, 200х200 см, 200х250 см, 250х250 см		
43.	Пеленки медицинские одноразовые Варианты исполнения: 1. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-ОБ-Э/30х50, ПеН-ОБ-Э/30х60, ПеН-ОБ-Э/30х70, ПеН-ОБ-Э/30х80, ПеН-ОБ-Э/30х90, ПеН-ОБ-Э/30х100, ПеН-ОБ-Э/40х40, ПеН-ОБ-Э/40х50, ПеН-ОБ-Э/40х60, ПеН-ОБ-Э/40х70, ПеН-ОБ-Э/40х80, ПеН-ОБ-Э/40х90, ПеН-ОБ-Э/40х100, ПеН-ОБ-Э/50х50, ПеН-ОБ-Э/50х60, ПеН-ОБ-Э/50х70, ПеН-ОБ-Э/50х80, ПеН-ОБ-Э/50х90, ПеН-ОБ-Э/50х100, ПеН-ОБ-Э/60х60, ПеН-ОБ-Э/60х70, ПеН-ОБ-Э/60х80, ПеН-ОБ-Э/60х90, ПеН-ОБ-Э/60х100, ПеН-ОБ-Э/70х70, ПеН-ОБ-Э/70х80, ПеН-ОБ-Э/70х90, ПеН-ОБ-Э/80х80, ПеН-ОБ-Э/80х90. 2. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-ОБ-С/30х50, ПеН-ОБ-С/30х60, ПеН-ОБ-С/30х70, ПеН-ОБ-С/30х80, ПеН-ОБ-С/30х90, ПеН-ОБ-С/30х100, ПеН-ОБ-С/40х40, ПеН-ОБ-С/40х50, ПеН-ОБ-С/40х60, ПеН-ОБ-С/40х70, ПеН-ОБ-С/40х80, ПеН-ОБ-С/40х90, ПеН-ОБ-С/40х100, ПеН-ОБ-С/50х50, ПеН-ОБ-С/50х60, ПеН-ОБ-С/50х70, ПеН-ОБ-С/50х80, ПеН-ОБ-С/50х90, ПеН-ОБ-С/50х100, ПеН-ОБ-С/60х60, ПеН-ОБ-С/60х70, ПеН-ОБ-С/60х80, ПеН-ОБ-С/60х90, ПеН-ОБ-С/60х100, ПеН-ОБ-С/70х70, ПеН-ОБ-С/70х80, ПеН-ОБ-С/70х90, ПеН-ОБ-С/80х80, ПеН-ОБ-С/80х90. 3. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-ОБ-К/30х50, ПеН-ОБ-К/30х60, ПеН-ОБ-К/30х70, ПеН-ОБ-К/30х80, ПеН-ОБ-К/30х90, ПеН-ОБ-К/30х100, ПеН-ОБ-К/40х40, ПеН-ОБ-К/40х50, ПеН-ОБ-К/40х60, ПеН-ОБ-К/40х70, ПеН-ОБ-К/40х80, ПеН-ОБ-К/40х90, ПеН-ОБ-К/40х100, ПеН-ОБ-К/50х50, ПеН-ОБ-К/50х60, ПеН-ОБ-К/50х70, ПеН-ОБ-К/50х80, ПеН-ОБ-К/50х90, ПеН-ОБ-К/50х100, ПеН-ОБ-К/60х60, ПеН-ОБ-К/60х70, ПеН-ОБ-К/60х80, ПеН-ОБ-К/60х90, ПеН-ОБ-К/60х100, ПеН-ОБ-К/70х70, ПеН-ОБ-	МИ.942281.001 П2	1 шт. (при необходим ости)

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	К/70х80, ПеН-0Б-К/70х90, ПеН-0Б-К/80х80, ПеН-0Б-К/80х90. 4. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-0Б-К+/30х50, ПеН-0Б-К+/30х60, ПеН-0Б-К+/30х70, ПеН-0Б-К+/30х80, ПеН-0Б-К+/30х90, ПеН-0Б-К+/30х100, ПеН-0Б-К+/40х40, ПеН-0Б-К+/40х50, ПеН-0Б-К+/40х60, ПеН-0Б-К+/40х70, ПеН-0Б-К+/40х80, ПеН-0Б-К+/40х90, ПеН-0Б-К+/40х100, ПеН-0Б-К+/50х50, ПеН-0Б-К+/50х60, ПеН-0Б-К+/50х70, ПеН-0Б-К+/50х80, ПеН-0Б-К+/50х90, ПеН-0Б-К+/50х100, ПеН-0Б-К+/60х60, ПеН-0Б-К+/60х70, ПеН-0Б-К+/60х80, ПеН-0Б-К+/60х90, ПеН-0Б-К+/60х100, ПеН-0Б-К+/70х70, ПеН-0Б-К+/70х80, ПеН-0Б-К+/70х90, ПеН-0Б-К+/80х80, ПеН-0Б-К+/80х90. 5. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-0Б-П/30х50, ПеН-0Б-П/30х60, ПеН-0Б-П/30х70, ПеН-0Б-П/30х80, ПеН-0Б-П/30х90, ПеН-0Б-П/30х100, ПеН-0Б-П/40х40, ПеН-0Б-П/40х50, ПеН-0Б-П/40х60, ПеН-0Б-П/40х70, ПеН-0Б-П/40х80, ПеН-0Б-П/40х90, ПеН-0Б-П/40х100, ПеН-0Б-П/50х50, ПеН-0Б-П/50х60, ПеН-0Б-П/50х70, ПеН-0Б-П/50х80, ПеН-0Б-П/50х90, ПеН-0Б-П/50х100, ПеН-0Б-П/60х60, ПеН-0Б-П/60х70, ПеН-0Б-П/60х80, ПеН-0Б-П/60х90, ПеН-0Б-П/60х100, ПеН-0Б-П/70х70, ПеН-0Б-П/70х80, ПеН-0Б-П/70х90, ПеН-0Б-П/80х80, ПеН-0Б-П/80х90. 6. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-0Б-П+/30х50, ПеН-0Б-П+/30х60, ПеН-0Б-П+/30х70, ПеН-0Б-П+/30х80, ПеН-0Б-П+/30х90, ПеН-0Б-П+/30х100, ПеН-0Б-П+/40х40, ПеН-0Б-П+/40х50, ПеН-0Б-П+/40х60, ПеН-0Б-П+/40х70, ПеН-0Б-П+/40х80, ПеН-0Б-П+/40х90, ПеН-0Б-П+/40х100, ПеН-0Б-П+/50х50, ПеН-0Б-П+/50х60, ПеН-0Б-П+/50х70, ПеН-0Б-П+/50х80, ПеН-0Б-П+/50х90, ПеН-0Б-П+/50х100, ПеН-0Б-П+/60х60, ПеН-0Б-П+/60х70, ПеН-0Б-П+/60х80, ПеН-0Б-П+/60х90, ПеН-0Б-П+/60х100, ПеН-0Б-П+/70х70, ПеН-0Б-П+/70х80, ПеН-0Б-П+/70х90, ПеН-0Б-П+/80х80, ПеН-0Б-П+/80х90. 7. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, голубого цвета, с поверхностной плотностью		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-0Г-Э/30х50, ПеН-0Г-Э/30х60, ПеН-0Г-Э/30х70, ПеН-0Г-Э/30х80, ПеН-0Г-Э/30х90, ПеН-0Г-Э/30х100, ПеН-0Г-Э/40х40, ПеН-0Г-Э/40х50, ПеН-0Г-Э/40х60, ПеН-0Г-Э/40х70, ПеН-0Г-Э/40х80, ПеН-0Г-Э/40х90, ПеН-0Г-Э/40х100, ПеН-0Г-Э/50х50, ПеН-0Г-Э/50х60, ПеН-0Г-Э/50х70, ПеН-0Г-Э/50х80, ПеН-0Г-Э/50х90, ПеН-0Г-Э/50х100, ПеН-0Г-Э/60х60, ПеН-0Г-Э/60х70, ПеН-0Г-Э/60х80, ПеН-0Г-Э/60х90, ПеН-0Г-Э/60х100, ПеН-0Г-Э/70х70, ПеН-0Г-Э/70х80, ПеН-0Г-Э/70х90, ПеН-0Г-Э/80х80, ПеН-0Г-Э/80х90. 8. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-0Г-С/30х50, ПеН-0Г-С/30х60, ПеН-0Г-С/30х70, ПеН-0Г-С/30х80, ПеН-0Г-С/30х90, ПеН-0Г-С/30х100, ПеН-0Г-С/40х40, ПеН-0Г-С/40х50, ПеН-0Г-С/40х60, ПеН-0Г-С/40х70, ПеН-0Г-С/40х80, ПеН-0Г-С/40х90, ПеН-0Г-С/40х100, ПеН-0Г-С/50х50, ПеН-0Г-С/50х60, ПеН-0Г-С/50х70, ПеН-0Г-С/50х80, ПеН-0Г-С/50х90, ПеН-0Г-С/50х100, ПеН-0Г-С/60х60, ПеН-0Г-С/60х70, ПеН-0Г-С/60х80, ПеН-0Г-С/60х90, ПеН-0Г-С/60х100, ПеН-0Г-С/70х70, ПеН-0Г-С/70х80, ПеН-0Г-С/70х90, ПеН-0Г-С/80х80, ПеН-0Г-С/80х90. 9. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-0Г-К/30х50, ПеН-0Г-К/30х60, ПеН-0Г-К/30х70, ПеН-0Г-К/30х80, ПеН-0Г-К/30х90, ПеН-0Г-К/30х100, ПеН-0Г-К/40х40, ПеН-0Г-К/40х50, ПеН-0Г-К/40х60, ПеН-0Г-К/40х70, ПеН-0Г-К/40х80, ПеН-0Г-К/40х90, ПеН-0Г-К/40х100, ПеН-0Г-К/50х50, ПеН-0Г-К/50х60, ПеН-0Г-К/50х70, ПеН-0Г-К/50х80, ПеН-0Г-К/50х90, ПеН-0Г-К/50х100, ПеН-0Г-К/60х60, ПеН-0Г-К/60х70, ПеН-0Г-К/60х80, ПеН-0Г-К/60х90, ПеН-0Г-К/60х100, ПеН-0Г-К/70х70, ПеН-0Г-К/70х80, ПеН-0Г-К/70х90, ПеН-0Г-К/80х80, ПеН-0Г-К/80х90. 10. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-0Г-К+/30х50, ПеН-0Г-К+/30х60, ПеН-0Г-К+/30х70, ПеН-0Г-К+/30х80, ПеН-0Г-К+/30х90, ПеН-0Г-К+/30х100, ПеН-0Г-К+/40х40, ПеН-0Г-К+/40х50, ПеН-0Г-К+/40х60, ПеН-0Г-К+/40х70,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ПеН-0Г-К+/40х80, ПеН-0Г-К+/40х90, ПеН-0Г-К+/40х100, ПеН-0Г-К+/50х50, ПеН-0Г-К+/50х60, ПеН-0Г-К+/50х70, ПеН-0Г-К+/50х80, ПеН-0Г-К+/50х90, ПеН-0Г-К+/50х100, ПеН-0Г-К+/60х60, ПеН-0Г-К+/60х70, ПеН-0Г-К+/60х80, ПеН-0Г-К+/60х90, ПеН-0Г-К+/60х100, ПеН-0Г-К+/70х70, ПеН-0Г-К+/70х80, ПеН-0Г-К+/70х90, ПеН-0Г-К+/80х80, ПеН-0Г-К+/80х90. 11. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-0Г-П/30х50, ПеН-0Г-П/30х60, ПеН-0Г-П/30х70, ПеН-0Г-П/30х80, ПеН-0Г-П/30х90, ПеН-0Г-П/30х100, ПеН-0Г-П/40х40, ПеН-0Г-П/40х50, ПеН-0Г-П/40х60, ПеН-0Г-П/40х70, ПеН-0Г-П/40х80, ПеН-0Г-П/40х90, ПеН-0Г-П/40х100, ПеН-0Г-П/50х50, ПеН-0Г-П/50х60, ПеН-0Г-П/50х70, ПеН-0Г-П/50х80, ПеН-0Г-П/50х90, ПеН-0Г-П/50х100, ПеН-0Г-П/60х60, ПеН-0Г-П/60х70, ПеН-0Г-П/60х80, ПеН-0Г-П/60х90, ПеН-0Г-П/60х100, ПеН-0Г-П/70х70, ПеН-0Г-П/70х80, ПеН-0Г-П/70х90, ПеН-0Г-П/80х80, ПеН-0Г-П/80х90. 12. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-0Г-П+/30х50, ПеН-0Г-П+/30х60, ПеН-0Г-П+/30х70, ПеН-0Г-П+/30х80, ПеН-0Г-П+/30х90, ПеН-0Г-П+/30х100, ПеН-0Г-П+/40х40, ПеН-0Г-П+/40х50, ПеН-0Г-П+/40х60, ПеН-0Г-П+/40х70, ПеН-0Г-П+/40х80, ПеН-0Г-П+/40х90, ПеН-0Г-П+/40х100, ПеН-0Г-П+/50х50, ПеН-0Г-П+/50х60, ПеН-0Г-П+/50х70, ПеН-0Г-П+/50х80, ПеН-0Г-П+/50х90, ПеН-0Г-П+/50х100, ПеН-0Г-П+/60х60, ПеН-0Г-П+/60х70, ПеН-0Г-П+/60х80, ПеН-0Г-П+/60х90, ПеН-0Г-П+/60х100, ПеН-0Г-П+/70х70, ПеН-0Г-П+/70х80, ПеН-0Г-П+/70х90, ПеН-0Г-П+/80х80, ПеН-0Г-П+/80х90. 13. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-0Ж-Э/30х50, ПеН-0Ж-Э/30х60, ПеН-0Ж-Э/30х70, ПеН-0Ж-Э/30х80, ПеН-0Ж-Э/30х90, ПеН-0Ж-Э/30х100, ПеН-0Ж-Э/40х40, ПеН-0Ж-Э/40х50, ПеН-0Ж-Э/40х60, ПеН-0Ж-Э/40х70, ПеН-0Ж-Э/40х80, ПеН-0Ж-Э/40х90, ПеН-0Ж-Э/40х100, ПеН-0Ж-Э/50х50, ПеН-0Ж-Э/50х60, ПеН-0Ж-Э/50х70, ПеН-0Ж-Э/50х80, ПеН-0Ж-Э/50х90, ПеН-0Ж-Э/50х100, ПеН-0Ж-Э/60х60, ПеН-0Ж-Э/60х70, ПеН-0Ж-Э/60х80, ПеН-0Ж-Э/60х90,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ПеН-ОЖ-Э/60х100, ПеН-ОЖ-Э/70х70, ПеН-ОЖ-Э/70х80, ПеН-ОЖ-Э/70х90, ПеН-ОЖ-Э/80х80, ПеН-ОЖ-Э/80х90. 14. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-ОЖ-С/30х50, ПеН-ОЖ-С/30х60, ПеН-ОЖ-С/30х70, ПеН-ОЖ-С/30х80, ПеН-ОЖ-С/30х90, ПеН-ОЖ-С/30х100, ПеН-ОЖ-С/40х40, ПеН-ОЖ-С/40х50, ПеН-ОЖ-С/40х60, ПеН-ОЖ-С/40х70, ПеН-ОЖ-С/40х80, ПеН-ОЖ-С/40х90, ПеН-ОЖ-С/40х100, ПеН-ОЖ-С/50х50, ПеН-ОЖ-С/50х60, ПеН-ОЖ-С/50х70, ПеН-ОЖ-С/50х80, ПеН-ОЖ-С/50х90, ПеН-ОЖ-С/50х100, ПеН-ОЖ-С/60х60, ПеН-ОЖ-С/60х70, ПеН-ОЖ-С/60х80, ПеН-ОЖ-С/60х90, ПеН-ОЖ-С/60х100, ПеН-ОЖ-С/70х70, ПеН-ОЖ-С/70х80, ПеН-ОЖ-С/70х90, ПеН-ОЖ-С/80х80, ПеН-ОЖ-С/80х90. 15. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-ОЖ-К/30х50, ПеН-ОЖ-К/30х60, ПеН-ОЖ-К/30х70, ПеН-ОЖ-К/30х80, ПеН-ОЖ-К/30х90, ПеН-ОЖ-К/30х100, ПеН-ОЖ-К/40х40, ПеН-ОЖ-К/40х50, ПеН-ОЖ-К/40х60, ПеН-ОЖ-К/40х70, ПеН-ОЖ-К/40х80, ПеН-ОЖ-К/40х90, ПеН-ОЖ-К/40х100, ПеН-ОЖ-К/50х50, ПеН-ОЖ-К/50х60, ПеН-ОЖ-К/50х70, ПеН-ОЖ-К/50х80, ПеН-ОЖ-К/50х90, ПеН-ОЖ-К/50х100, ПеН-ОЖ-К/60х60, ПеН-ОЖ-К/60х70, ПеН-ОЖ-К/60х80, ПеН-ОЖ-К/60х90, ПеН-ОЖ-К/60х100, ПеН-ОЖ-К/70х70, ПеН-ОЖ-К/70х80, ПеН-ОЖ-К/70х90, ПеН-ОЖ-К/80х80, ПеН-ОЖ-К/80х90. 16. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-ОЖ-К+/30х50, ПеН-ОЖ-К+/30х60, ПеН-ОЖ-К+/30х70, ПеН-ОЖ-К+/30х80, ПеН-ОЖ-К+/30х90, ПеН-ОЖ-К+/30х100, ПеН-ОЖ-К+/40х40, ПеН-ОЖ-К+/40х50, ПеН-ОЖ-К+/40х60, ПеН-ОЖ-К+/40х70, ПеН-ОЖ-К+/40х80, ПеН-ОЖ-К+/40х90, ПеН-ОЖ-К+/40х100, ПеН-ОЖ-К+/50х50, ПеН-ОЖ-К+/50х60, ПеН-ОЖ-К+/50х70, ПеН-ОЖ-К+/50х80, ПеН-ОЖ-К+/50х90, ПеН-ОЖ-К+/50х100, ПеН-ОЖ-К+/60х60, ПеН-ОЖ-К+/60х70, ПеН-ОЖ-К+/60х80, ПеН-ОЖ-К+/60х90, ПеН-ОЖ-К+/60х100, ПеН-ОЖ-К+/70х70, ПеН-ОЖ-К+/70х80, ПеН-ОЖ-К+/70х90, ПеН-ОЖ-К+/80х80, ПеН-ОЖ-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	К+/80х90. 17. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-ОЖ-П/30х50, ПеН-ОЖ-П/30х60, ПеН-ОЖ-П/30х70, ПеН-ОЖ-П/30х80, ПеН-ОЖ-П/30х90, ПеН-ОЖ-П/30х100, ПеН-ОЖ-П/40х40, ПеН-ОЖ-П/40х50, ПеН-ОЖ-П/40х60, ПеН-ОЖ-П/40х70, ПеН-ОЖ-П/40х80, ПеН-ОЖ-П/40х90, ПеН-ОЖ-П/40х100, ПеН-ОЖ-П/50х50, ПеН-ОЖ-П/50х60, ПеН-ОЖ-П/50х70, ПеН-ОЖ-П/50х80, ПеН-ОЖ-П/50х90, ПеН-ОЖ-П/50х100, ПеН-ОЖ-П/60х60, ПеН-ОЖ-П/60х70, ПеН-ОЖ-П/60х80, ПеН-ОЖ-П/60х90, ПеН-ОЖ-П/60х100, ПеН-ОЖ-П/70х70, ПеН-ОЖ-П/70х80, ПеН-ОЖ-П/70х90, ПеН-ОЖ-П/80х80, ПеН-ОЖ-П/80х90. 18. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-ОЖ-П+/30х50, ПеН-ОЖ-П+/30х60, ПеН-ОЖ-П+/30х70, ПеН-ОЖ-П+/30х80, ПеН-ОЖ-П+/30х90, ПеН-ОЖ-П+/30х100, ПеН-ОЖ-П+/40х40, ПеН-ОЖ-П+/40х50, ПеН-ОЖ-П+/40х60, ПеН-ОЖ-П+/40х70, ПеН-ОЖ-П+/40х80, ПеН-ОЖ-П+/40х90, ПеН-ОЖ-П+/40х100, ПеН-ОЖ-П+/50х50, ПеН-ОЖ-П+/50х60, ПеН-ОЖ-П+/50х70, ПеН-ОЖ-П+/50х80, ПеН-ОЖ-П+/50х90, ПеН-ОЖ-П+/50х100, ПеН-ОЖ-П+/60х60, ПеН-ОЖ-П+/60х70, ПеН-ОЖ-П+/60х80, ПеН-ОЖ-П+/60х90, ПеН-ОЖ-П+/60х100, ПеН-ОЖ-П+/70х70, ПеН-ОЖ-П+/70х80, ПеН-ОЖ-П+/70х90, ПеН-ОЖ-П+/80х80, ПеН-ОЖ-П+/80х90. 19. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-ОР-Э/30х50, ПеН-ОР-Э/30х60, ПеН-ОР-Э/30х70, ПеН-ОР-Э/30х80, ПеН-ОР-Э/30х90, ПеН-ОР-Э/30х100, ПеН-ОР-Э/40х40, ПеН-ОР-Э/40х50, ПеН-ОР-Э/40х60, ПеН-ОР-Э/40х70, ПеН-ОР-Э/40х80, ПеН-ОР-Э/40х90, ПеН-ОР-Э/40х100, ПеН-ОР-Э/50х50, ПеН-ОР-Э/50х60, ПеН-ОР-Э/50х70, ПеН-ОР-Э/50х80, ПеН-ОР-Э/50х90, ПеН-ОР-Э/50х100, ПеН-ОР-Э/60х60, ПеН-ОР-Э/60х70, ПеН-ОР-Э/60х80, ПеН-ОР-Э/60х90, ПеН-ОР-Э/60х100, ПеН-ОР-Э/70х70, ПеН-ОР-Э/70х80, ПеН-ОР-Э/70х90, ПеН-ОР-Э/80х80, ПеН-ОР-Э/80х90. 20. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-ОР-С/30х50, ПеН-ОР-С/30х60, ПеН-ОР-С/30х70, ПеН-ОР-С/30х80, ПеН-ОР-С/30х90, ПеН-ОР-С/30х100, ПеН-ОР-С/40х40, ПеН-ОР-С/40х50, ПеН-ОР-С/40х60, ПеН-ОР-С/40х70, ПеН-ОР-С/40х80, ПеН-ОР-С/40х90, ПеН-ОР-С/40х100, ПеН-ОР-С/50х50, ПеН-ОР-С/50х60, ПеН-ОР-С/50х70, ПеН-ОР-С/50х80, ПеН-ОР-С/50х90, ПеН-ОР-С/50х100, ПеН-ОР-С/60х60, ПеН-ОР-С/60х70, ПеН-ОР-С/60х80, ПеН-ОР-С/60х90, ПеН-ОР-С/60х100, ПеН-ОР-С/70х70, ПеН-ОР-С/70х80, ПеН-ОР-С/70х90, ПеН-ОР-С/80х80, ПеН-ОР-С/80х90. 21. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-ОР-К/30х50, ПеН-ОР-К/30х60, ПеН-ОР-К/30х70, ПеН-ОР-К/30х80, ПеН-ОР-К/30х90, ПеН-ОР-К/30х100, ПеН-ОР-К/40х40, ПеН-ОР-К/40х50, ПеН-ОР-К/40х60, ПеН-ОР-К/40х70, ПеН-ОР-К/40х80, ПеН-ОР-К/40х90, ПеН-ОР-К/40х100, ПеН-ОР-К/50х50, ПеН-ОР-К/50х60, ПеН-ОР-К/50х70, ПеН-ОР-К/50х80, ПеН-ОР-К/50х90, ПеН-ОР-К/50х100, ПеН-ОР-К/60х60, ПеН-ОР-К/60х70, ПеН-ОР-К/60х80, ПеН-ОР-К/60х90, ПеН-ОР-К/60х100, ПеН-ОР-К/70х70, ПеН-ОР-К/70х80, ПеН-ОР-К/70х90, ПеН-ОР-К/80х80, ПеН-ОР-К/80х90. 22. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-ОР-К+/30х50, ПеН-ОР-К+/30х60, ПеН-ОР-К+/30х70, ПеН-ОР-К+/30х80, ПеН-ОР-К+/30х90, ПеН-ОР-К+/30х100, ПеН-ОР-К+/40х40, ПеН-ОР-К+/40х50, ПеН-ОР-К+/40х60, ПеН-ОР-К+/40х70, ПеН-ОР-К+/40х80, ПеН-ОР-К+/40х90, ПеН-ОР-К+/40х100, ПеН-ОР-К+/50х50, ПеН-ОР-К+/50х60, ПеН-ОР-К+/50х70, ПеН-ОР-К+/50х80, ПеН-ОР-К+/50х90, ПеН-ОР-К+/50х100, ПеН-ОР-К+/60х60, ПеН-ОР-К+/60х70, ПеН-ОР-К+/60х80, ПеН-ОР-К+/60х90, ПеН-ОР-К+/60х100, ПеН-ОР-К+/70х70, ПеН-ОР-К+/70х80, ПеН-ОР-К+/70х90, ПеН-ОР-К+/80х80, ПеН-ОР-К+/80х90. 23. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-ОР-П/30х50, ПеН-ОР-П/30х60, ПеН-ОР-П/30х70, ПеН-ОР-П/30х80, ПеН-ОР-П/30х90, ПеН-ОР-П/30х100, ПеН-ОР-П/40х40, ПеН-ОР-П/40х50,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ПеН-ОР-П/40х60, ПеН-ОР-П/40х70, ПеН-ОР-П/40х80, ПеН-ОР-П/40х90, ПеН-ОР-П/40х100, ПеН-ОР-П/50х50, ПеН-ОР-П/50х60, ПеН-ОР-П/50х70, ПеН-ОР-П/50х80, ПеН-ОР-П/50х90, ПеН-ОР-П/50х100, ПеН-ОР-П/60х60, ПеН-ОР-П/60х70, ПеН-ОР-П/60х80, ПеН-ОР-П/60х90, ПеН-ОР-П/60х100, ПеН-ОР-П/70х70, ПеН-ОР-П/70х80, ПеН-ОР-П/70х90, ПеН-ОР-П/80х80, ПеН-ОР-П/80х90. 24. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-ОР-П+/30х50, ПеН-ОР-П+/30х60, ПеН-ОР-П+/30х70, ПеН-ОР-П+/30х80, ПеН-ОР-П+/30х90, ПеН-ОР-П+/30х100, ПеН-ОР-П+/40х40, ПеН-ОР-П+/40х50, ПеН-ОР-П+/40х60, ПеН-ОР-П+/40х70, ПеН-ОР-П+/40х80, ПеН-ОР-П+/40х90, ПеН-ОР-П+/40х100, ПеН-ОР-П+/50х50, ПеН-ОР-П+/50х60, ПеН-ОР-П+/50х70, ПеН-ОР-П+/50х80, ПеН-ОР-П+/50х90, ПеН-ОР-П+/50х100, ПеН-ОР-П+/60х60, ПеН-ОР-П+/60х70, ПеН-ОР-П+/60х80, ПеН-ОР-П+/60х90, ПеН-ОР-П+/60х100, ПеН-ОР-П+/70х70, ПеН-ОР-П+/70х80, ПеН-ОР-П+/70х90, ПеН-ОР-П+/80х80, ПеН-ОР-П+/80х90. 25. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-03-Э/30х50, ПеН-03-Э/30х60, ПеН-03-Э/30х70, ПеН-03-Э/30х80, ПеН-03-Э/30х90, ПеН-03-Э/30х100, ПеН-03-Э/40х40, ПеН-03-Э/40х50, ПеН-03-Э/40х60, ПеН-03-Э/40х70, ПеН-03-Э/40х80, ПеН-03-Э/40х90, ПеН-03-Э/40х100, ПеН-03-Э/50х50, ПеН-03-Э/50х60, ПеН-03-Э/50х70, ПеН-03-Э/50х80, ПеН-03-Э/50х90, ПеН-03-Э/50х100, ПеН-03-Э/60х60, ПеН-03-Э/60х70, ПеН-03-Э/60х80, ПеН-03-Э/60х90, ПеН-03-Э/60х100, ПеН-03-Э/70х70, ПеН-03-Э/70х80, ПеН-03-Э/70х90, ПеН-03-Э/80х80, ПеН-03-Э/80х90. 26. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-03-С/30х50, ПеН-03-С/30х60, ПеН-03-С/30х70, ПеН-03-С/30х80, ПеН-03-С/30х90, ПеН-03-С/30х100, ПеН-03-С/40х40, ПеН-03-С/40х50, ПеН-03-С/40х60, ПеН-03-С/40х70, ПеН-03-С/40х80, ПеН-03-С/40х90, ПеН-03-С/40х100, ПеН-03-С/50х50, ПеН-03-С/50х60, ПеН-03-С/50х70, ПеН-03-С/50х80, ПеН-03-С/50х90, ПеН-03-С/50х100, ПеН-03-С/60х60, ПеН-03-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	С/60х70, ПеН-03-С/60х80, ПеН-03-С/60х90, ПеН-03-С/60х100, ПеН-03-С/70х70, ПеН-03-С/70х80, ПеН-03-С/70х90, ПеН-03-С/80х80, ПеН-03-С/80х90. 27. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-03-К/30х50, ПеН-03-К/30х60, ПеН-03-К/30х70, ПеН-03-К/30х80, ПеН-03-К/30х90, ПеН-03-К/30х100, ПеН-03-К/40х40, ПеН-03-К/40х50, ПеН-03-К/40х60, ПеН-03-К/40х70, ПеН-03-К/40х80, ПеН-03-К/40х90, ПеН-03-К/40х100, ПеН-03-К/50х50, ПеН-03-К/50х60, ПеН-03-К/50х70, ПеН-03-К/50х80, ПеН-03-К/50х90, ПеН-03-К/50х100, ПеН-03-К/60х60, ПеН-03-К/60х70, ПеН-03-К/60х80, ПеН-03-К/60х90, ПеН-03-К/60х100, ПеН-03-К/70х70, ПеН-03-К/70х80, ПеН-03-К/70х90, ПеН-03-К/80х80, ПеН-03-К/80х90. 28. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-03-К+/30х50, ПеН-03-К+/30х60, ПеН-03-К+/30х70, ПеН-03-К+/30х80, ПеН-03-К+/30х90, ПеН-03-К+/30х100, ПеН-03-К+/40х40, ПеН-03-К+/40х50, ПеН-03-К+/40х60, ПеН-03-К+/40х70, ПеН-03-К+/40х80, ПеН-03-К+/40х90, ПеН-03-К+/40х100, ПеН-03-К+/50х50, ПеН-03-К+/50х60, ПеН-03-К+/50х70, ПеН-03-К+/50х80, ПеН-03-К+/50х90, ПеН-03-К+/50х100, ПеН-03-К+/60х60, ПеН-03-К+/60х70, ПеН-03-К+/60х80, ПеН-03-К+/60х90, ПеН-03-К+/60х100, ПеН-03-К+/70х70, ПеН-03-К+/70х80, ПеН-03-К+/70х90, ПеН-03-К+/80х80, ПеН-03-К+/80х90. 29. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-03-П/30х50, ПеН-03-П/30х60, ПеН-03-П/30х70, ПеН-03-П/30х80, ПеН-03-П/30х90, ПеН-03-П/30х100, ПеН-03-П/40х40, ПеН-03-П/40х50, ПеН-03-П/40х60, ПеН-03-П/40х70, ПеН-03-П/40х80, ПеН-03-П/40х90, ПеН-03-П/40х100, ПеН-03-П/50х50, ПеН-03-П/50х60, ПеН-03-П/50х70, ПеН-03-П/50х80, ПеН-03-П/50х90, ПеН-03-П/50х100, ПеН-03-П/60х60, ПеН-03-П/60х70, ПеН-03-П/60х80, ПеН-03-П/60х90, ПеН-03-П/60х100, ПеН-03-П/70х70, ПеН-03-П/70х80, ПеН-03-П/70х90, ПеН-03-П/80х80, ПеН-03-П/80х90.		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	30. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-03-П+/30х50, ПеН-03-П+/30х60, ПеН-03-П+/30х70, ПеН-03-П+/30х80, ПеН-03-П+/30х90, ПеН-03-П+/30х100, ПеН-03-П+/40х40, ПеН-03-П+/40х50, ПеН-03-П+/40х60, ПеН-03-П+/40х70, ПеН-03-П+/40х80, ПеН-03-П+/40х90, ПеН-03-П+/40х100, ПеН-03-П+/50х50, ПеН-03-П+/50х60, ПеН-03-П+/50х70, ПеН-03-П+/50х80, ПеН-03-П+/50х90, ПеН-03-П+/50х100, ПеН-03-П+/60х60, ПеН-03-П+/60х70, ПеН-03-П+/60х80, ПеН-03-П+/60х90, ПеН-03-П+/60х100, ПеН-03-П+/70х70, ПеН-03-П+/70х80, ПеН-03-П+/70х90, ПеН-03-П+/80х80, ПеН-03-П+/80х90. 31. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-0Ф-Э/30х50, ПеН-0Ф-Э/30х60, ПеН-0Ф-Э/30х70, ПеН-0Ф-Э/30х80, ПеН-0Ф-Э/30х90, ПеН-0Ф-Э/30х100, ПеН-0Ф-Э/40х40, ПеН-0Ф-Э/40х50, ПеН-0Ф-Э/40х60, ПеН-0Ф-Э/40х70, ПеН-0Ф-Э/40х80, ПеН-0Ф-Э/40х90, ПеН-0Ф-Э/40х100, ПеН-0Ф-Э/50х50, ПеН-0Ф-Э/50х60, ПеН-0Ф-Э/50х70, ПеН-0Ф-Э/50х80, ПеН-0Ф-Э/50х90, ПеН-0Ф-Э/50х100, ПеН-0Ф-Э/60х60, ПеН-0Ф-Э/60х70, ПеН-0Ф-Э/60х80, ПеН-0Ф-Э/60х90, ПеН-0Ф-Э/60х100, ПеН-0Ф-Э/70х70, ПеН-0Ф-Э/70х80, ПеН-0Ф-Э/70х90, ПеН-0Ф-Э/80х80, ПеН-0Ф-Э/80х90. 32. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-0Ф-С/30х50, ПеН-0Ф-С/30х60, ПеН-0Ф-С/30х70, ПеН-0Ф-С/30х80, ПеН-0Ф-С/30х90, ПеН-0Ф-С/30х100, ПеН-0Ф-С/40х40, ПеН-0Ф-С/40х50, ПеН-0Ф-С/40х60, ПеН-0Ф-С/40х70, ПеН-0Ф-С/40х80, ПеН-0Ф-С/40х90, ПеН-0Ф-С/40х100, ПеН-0Ф-С/50х50, ПеН-0Ф-С/50х60, ПеН-0Ф-С/50х70, ПеН-0Ф-С/50х80, ПеН-0Ф-С/50х90, ПеН-0Ф-С/50х100, ПеН-0Ф-С/60х60, ПеН-0Ф-С/60х70, ПеН-0Ф-С/60х80, ПеН-0Ф-С/60х90, ПеН-0Ф-С/60х100, ПеН-0Ф-С/70х70, ПеН-0Ф-С/70х80, ПеН-0Ф-С/70х90, ПеН-0Ф-С/80х80, ПеН-0Ф-С/80х90. 33. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-0Ф-К/30х50, ПеН-0Ф-К/30х60, ПеН-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	0Ф-К/30х70, ПеН-0Ф-К/30х80, ПеН-0Ф-К/30х90, ПеН-0Ф-К/30х100, ПеН-0Ф-К/40х40, ПеН-0Ф-К/40х50, ПеН-0Ф-К/40х60, ПеН-0Ф-К/40х70, ПеН-0Ф-К/40х80, ПеН-0Ф-К/40х90, ПеН-0Ф-К/40х100, ПеН-0Ф-К/50х50, ПеН-0Ф-К/50х60, ПеН-0Ф-К/50х70, ПеН-0Ф-К/50х80, ПеН-0Ф-К/50х90, ПеН-0Ф-К/50х100, ПеН-0Ф-К/60х60, ПеН-0Ф-К/60х70, ПеН-0Ф-К/60х80, ПеН-0Ф-К/60х90, ПеН-0Ф-К/60х100, ПеН-0Ф-К/70х70, ПеН-0Ф-К/70х80, ПеН-0Ф-К/70х90, ПеН-0Ф-К/80х80, ПеН-0Ф-К/80х90. 34. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-0Ф-К+/30х50, ПеН-0Ф-К+/30х60, ПеН-0Ф-К+/30х70, ПеН-0Ф-К+/30х80, ПеН-0Ф-К+/30х90, ПеН-0Ф-К+/30х100, ПеН-0Ф-К+/40х40, ПеН-0Ф-К+/40х50, ПеН-0Ф-К+/40х60, ПеН-0Ф-К+/40х70, ПеН-0Ф-К+/40х80, ПеН-0Ф-К+/40х90, ПеН-0Ф-К+/40х100, ПеН-0Ф-К+/50х50, ПеН-0Ф-К+/50х60, ПеН-0Ф-К+/50х70, ПеН-0Ф-К+/50х80, ПеН-0Ф-К+/50х90, ПеН-0Ф-К+/50х100, ПеН-0Ф-К+/60х60, ПеН-0Ф-К+/60х70, ПеН-0Ф-К+/60х80, ПеН-0Ф-К+/60х90, ПеН-0Ф-К+/60х100, ПеН-0Ф-К+/70х70, ПеН-0Ф-К+/70х80, ПеН-0Ф-К+/70х90, ПеН-0Ф-К+/80х80, ПеН-0Ф-К+/80х90. 35. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-0Ф-П/30х50, ПеН-0Ф-П/30х60, ПеН-0Ф-П/30х70, ПеН-0Ф-П/30х80, ПеН-0Ф-П/30х90, ПеН-0Ф-П/30х100, ПеН-0Ф-П/40х40, ПеН-0Ф-П/40х50, ПеН-0Ф-П/40х60, ПеН-0Ф-П/40х70, ПеН-0Ф-П/40х80, ПеН-0Ф-П/40х90, ПеН-0Ф-П/40х100, ПеН-0Ф-П/50х50, ПеН-0Ф-П/50х60, ПеН-0Ф-П/50х70, ПеН-0Ф-П/50х80, ПеН-0Ф-П/50х90, ПеН-0Ф-П/50х100, ПеН-0Ф-П/60х60, ПеН-0Ф-П/60х70, ПеН-0Ф-П/60х80, ПеН-0Ф-П/60х90, ПеН-0Ф-П/60х100, ПеН-0Ф-П/70х70, ПеН-0Ф-П/70х80, ПеН-0Ф-П/70х90, ПеН-0Ф-П/80х80, ПеН-0Ф-П/80х90. 36. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-0Ф-П+/30х50, ПеН-0Ф-П+/30х60, ПеН-0Ф-П+/30х70, ПеН-0Ф-П+/30х80, ПеН-0Ф-П+/30х90, ПеН-0Ф-П+/30х100, ПеН-0Ф-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	П+/40х40, ПеН-0Ф-П+/40х50, ПеН-0Ф-П+/40х60, ПеН-0Ф-П+/40х70, ПеН-0Ф-П+/40х80, ПеН-0Ф-П+/40х90, ПеН-0Ф-П+/40х100, ПеН-0Ф-П+/50х50, ПеН-0Ф-П+/50х60, ПеН-0Ф-П+/50х70, ПеН-0Ф-П+/50х80, ПеН-0Ф-П+/50х90, ПеН-0Ф-П+/50х100, ПеН-0Ф-П+/60х60, ПеН-0Ф-П+/60х70, ПеН-0Ф-П+/60х80, ПеН-0Ф-П+/60х90, ПеН-0Ф-П+/60х100, ПеН-0Ф-П+/70х70, ПеН-0Ф-П+/70х80, ПеН-0Ф-П+/70х90, ПеН-0Ф-П+/80х80, ПеН-0Ф-П+/80х90. 37. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-1Б-Э/30х50, ПеН-1Б-Э/30х60, ПеН-1Б-Э/30х70, ПеН-1Б-Э/30х80, ПеН-1Б-Э/30х90, ПеН-1Б-Э/30х100, ПеН-1Б-Э/40х40, ПеН-1Б-Э/40х50, ПеН-1Б-Э/40х60, ПеН-1Б-Э/40х70, ПеН-1Б-Э/40х80, ПеН-1Б-Э/40х90, ПеН-1Б-Э/40х100, ПеН-1Б-Э/50х50, ПеН-1Б-Э/50х60, ПеН-1Б-Э/50х70, ПеН-1Б-Э/50х80, ПеН-1Б-Э/50х90, ПеН-1Б-Э/50х100, ПеН-1Б-Э/60х60, ПеН-1Б-Э/60х70, ПеН-1Б-Э/60х80, ПеН-1Б-Э/60х90, ПеН-1Б-Э/60х100, ПеН-1Б-Э/70х70, ПеН-1Б-Э/70х80, ПеН-1Б-Э/70х90, ПеН-1Б-Э/80х80, ПеН-1Б-Э/80х90. 38. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-1Б-С/30х50, ПеН-1Б-С/30х60, ПеН-1Б-С/30х70, ПеН-1Б-С/30х80, ПеН-1Б-С/30х90, ПеН-1Б-С/30х100, ПеН-1Б-С/40х40, ПеН-1Б-С/40х50, ПеН-1Б-С/40х60, ПеН-1Б-С/40х70, ПеН-1Б-С/40х80, ПеН-1Б-С/40х90, ПеН-1Б-С/40х100, ПеН-1Б-С/50х50, ПеН-1Б-С/50х60, ПеН-1Б-С/50х70, ПеН-1Б-С/50х80, ПеН-1Б-С/50х90, ПеН-1Б-С/50х100, ПеН-1Б-С/60х60, ПеН-1Б-С/60х70, ПеН-1Б-С/60х80, ПеН-1Б-С/60х90, ПеН-1Б-С/60х100, ПеН-1Б-С/70х70, ПеН-1Б-С/70х80, ПеН-1Б-С/70х90, ПеН-1Б-С/80х80, ПеН-1Б-С/80х90. 39. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-1Б-К/30х50, ПеН-1Б-К/30х60, ПеН-1Б-К/30х70, ПеН-1Б-К/30х80, ПеН-1Б-К/30х90, ПеН-1Б-К/30х100, ПеН-1Б-К/40х40, ПеН-1Б-К/40х50, ПеН-1Б-К/40х60, ПеН-1Б-К/40х70, ПеН-1Б-К/40х80, ПеН-1Б-К/40х90, ПеН-1Б-К/40х100, ПеН-1Б-К/50х50, ПеН-1Б-К/50х60,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ПеН-1Б-К/50х70, ПеН-1Б-К/50х80, ПеН-1Б-К/50х90, ПеН-1Б-К/50х100, ПеН-1Б-К/60х60, ПеН-1Б-К/60х70, ПеН-1Б-К/60х80, ПеН-1Б-К/60х90, ПеН-1Б-К/60х100, ПеН-1Б-К/70х70, ПеН-1Б-К/70х80, ПеН-1Б-К/70х90, ПеН-1Б-К/80х80, ПеН-1Б-К/80х90. 40. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-1Б-К+/30х50, ПеН-1Б-К+/30х60, ПеН-1Б-К+/30х70, ПеН-1Б-К+/30х80, ПеН-1Б-К+/30х90, ПеН-1Б-К+/30х100, ПеН-1Б-К+/40х40, ПеН-1Б-К+/40х50, ПеН-1Б-К+/40х60, ПеН-1Б-К+/40х70, ПеН-1Б-К+/40х80, ПеН-1Б-К+/40х90, ПеН-1Б-К+/40х100, ПеН-1Б-К+/50х50, ПеН-1Б-К+/50х60, ПеН-1Б-К+/50х70, ПеН-1Б-К+/50х80, ПеН-1Б-К+/50х90, ПеН-1Б-К+/50х100, ПеН-1Б-К+/60х60, ПеН-1Б-К+/60х70, ПеН-1Б-К+/60х80, ПеН-1Б-К+/60х90, ПеН-1Б-К+/60х100, ПеН-1Б-К+/70х70, ПеН-1Б-К+/70х80, ПеН-1Б-К+/70х90, ПеН-1Б-К+/80х80, ПеН-1Б-К+/80х90. 41. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-1Б-П/30х50, ПеН-1Б-П/30х60, ПеН-1Б-П/30х70, ПеН-1Б-П/30х80, ПеН-1Б-П/30х90, ПеН-1Б-П/30х100, ПеН-1Б-П/40х40, ПеН-1Б-П/40х50, ПеН-1Б-П/40х60, ПеН-1Б-П/40х70, ПеН-1Б-П/40х80, ПеН-1Б-П/40х90, ПеН-1Б-П/40х100, ПеН-1Б-П/50х50, ПеН-1Б-П/50х60, ПеН-1Б-П/50х70, ПеН-1Б-П/50х80, ПеН-1Б-П/50х90, ПеН-1Б-П/50х100, ПеН-1Б-П/60х60, ПеН-1Б-П/60х70, ПеН-1Б-П/60х80, ПеН-1Б-П/60х90, ПеН-1Б-П/60х100, ПеН-1Б-П/70х70, ПеН-1Б-П/70х80, ПеН-1Б-П/70х90, ПеН-1Б-П/80х80, ПеН-1Б-П/80х90. 42. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-1Б-П+/30х50, ПеН-1Б-П+/30х60, ПеН-1Б-П+/30х70, ПеН-1Б-П+/30х80, ПеН-1Б-П+/30х90, ПеН-1Б-П+/30х100, ПеН-1Б-П+/40х40, ПеН-1Б-П+/40х50, ПеН-1Б-П+/40х60, ПеН-1Б-П+/40х70, ПеН-1Б-П+/40х80, ПеН-1Б-П+/40х90, ПеН-1Б-П+/40х100, ПеН-1Б-П+/50х50, ПеН-1Б-П+/50х60, ПеН-1Б-П+/50х70, ПеН-1Б-П+/50х80, ПеН-1Б-П+/50х90, ПеН-1Б-П+/50х100, ПеН-1Б-П+/60х60, ПеН-1Б-П+/60х70, ПеН-1Б-П+/60х80, ПеН-1Б-П+/60х90,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ПеН-1Б-П+/60х100, ПеН-1Б-П+/70х70, ПеН-1Б-П+/70х80, ПеН-1Б-П+/70х90, ПеН-1Б-П+/80х80, ПеН-1Б-П+/80х90. 43. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-1Г-Э/30х50, ПеН-1Г-Э/30х60, ПеН-1Г-Э/30х70, ПеН-1Г-Э/30х80, ПеН-1Г-Э/30х90, ПеН-1Г-Э/30х100, ПеН-1Г-Э/40х40, ПеН-1Г-Э/40х50, ПеН-1Г-Э/40х60, ПеН-1Г-Э/40х70, ПеН-1Г-Э/40х80, ПеН-1Г-Э/40х90, ПеН-1Г-Э/40х100, ПеН-1Г-Э/50х50, ПеН-1Г-Э/50х60, ПеН-1Г-Э/50х70, ПеН-1Г-Э/50х80, ПеН-1Г-Э/50х90, ПеН-1Г-Э/50х100, ПеН-1Г-Э/60х60, ПеН-1Г-Э/60х70, ПеН-1Г-Э/60х80, ПеН-1Г-Э/60х90, ПеН-1Г-Э/60х100, ПеН-1Г-Э/70х70, ПеН-1Г-Э/70х80, ПеН-1Г-Э/70х90, ПеН-1Г-Э/80х80, ПеН-1Г-Э/80х90. 44. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-1Г-С/30х50, ПеН-1Г-С/30х60, ПеН-1Г-С/30х70, ПеН-1Г-С/30х80, ПеН-1Г-С/30х90, ПеН-1Г-С/30х100, ПеН-1Г-С/40х40, ПеН-1Г-С/40х50, ПеН-1Г-С/40х60, ПеН-1Г-С/40х70, ПеН-1Г-С/40х80, ПеН-1Г-С/40х90, ПеН-1Г-С/40х100, ПеН-1Г-С/50х50, ПеН-1Г-С/50х60, ПеН-1Г-С/50х70, ПеН-1Г-С/50х80, ПеН-1Г-С/50х90, ПеН-1Г-С/50х100, ПеН-1Г-С/60х60, ПеН-1Г-С/60х70, ПеН-1Г-С/60х80, ПеН-1Г-С/60х90, ПеН-1Г-С/60х100, ПеН-1Г-С/70х70, ПеН-1Г-С/70х80, ПеН-1Г-С/70х90, ПеН-1Г-С/80х80, ПеН-1Г-С/80х90. 45. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-1Г-К/30х50, ПеН-1Г-К/30х60, ПеН-1Г-К/30х70, ПеН-1Г-К/30х80, ПеН-1Г-К/30х90, ПеН-1Г-К/30х100, ПеН-1Г-К/40х40, ПеН-1Г-К/40х50, ПеН-1Г-К/40х60, ПеН-1Г-К/40х70, ПеН-1Г-К/40х80, ПеН-1Г-К/40х90, ПеН-1Г-К/40х100, ПеН-1Г-К/50х50, ПеН-1Г-К/50х60, ПеН-1Г-К/50х70, ПеН-1Г-К/50х80, ПеН-1Г-К/50х90, ПеН-1Г-К/50х100, ПеН-1Г-К/60х60, ПеН-1Г-К/60х70, ПеН-1Г-К/60х80, ПеН-1Г-К/60х90, ПеН-1Г-К/60х100, ПеН-1Г-К/70х70, ПеН-1Г-К/70х80, ПеН-1Г-К/70х90, ПеН-1Г-К/80х80, ПеН-1Г-К/80х90. 46. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	СМС, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-1Г-К+/30х50, ПеН-1Г-К+/30х60, ПеН-1Г-К+/30х70, ПеН-1Г-К+/30х80, ПеН-1Г-К+/30х90, ПеН-1Г-К+/30х100, ПеН-1Г-К+/40х40, ПеН-1Г-К+/40х50, ПеН-1Г-К+/40х60, ПеН-1Г-К+/40х70, ПеН-1Г-К+/40х80, ПеН-1Г-К+/40х90, ПеН-1Г-К+/40х100, ПеН-1Г-К+/50х50, ПеН-1Г-К+/50х60, ПеН-1Г-К+/50х70, ПеН-1Г-К+/50х80, ПеН-1Г-К+/50х90, ПеН-1Г-К+/50х100, ПеН-1Г-К+/60х60, ПеН-1Г-К+/60х70, ПеН-1Г-К+/60х80, ПеН-1Г-К+/60х90, ПеН-1Г-К+/60х100, ПеН-1Г-К+/70х70, ПеН-1Г-К+/70х80, ПеН-1Г-К+/70х90, ПеН-1Г-К+/80х80, ПеН-1Г-К+/80х90. 47. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-1Г-П/30х50, ПеН-1Г-П/30х60, ПеН-1Г-П/30х70, ПеН-1Г-П/30х80, ПеН-1Г-П/30х90, ПеН-1Г-П/30х100, ПеН-1Г-П/40х40, ПеН-1Г-П/40х50, ПеН-1Г-П/40х60, ПеН-1Г-П/40х70, ПеН-1Г-П/40х80, ПеН-1Г-П/40х90, ПеН-1Г-П/40х100, ПеН-1Г-П/50х50, ПеН-1Г-П/50х60, ПеН-1Г-П/50х70, ПеН-1Г-П/50х80, ПеН-1Г-П/50х90, ПеН-1Г-П/50х100, ПеН-1Г-П/60х60, ПеН-1Г-П/60х70, ПеН-1Г-П/60х80, ПеН-1Г-П/60х90, ПеН-1Г-П/60х100, ПеН-1Г-П/70х70, ПеН-1Г-П/70х80, ПеН-1Г-П/70х90, ПеН-1Г-П/80х80, ПеН-1Г-П/80х90. 48. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-1Г-П+/30х50, ПеН-1Г-П+/30х60, ПеН-1Г-П+/30х70, ПеН-1Г-П+/30х80, ПеН-1Г-П+/30х90, ПеН-1Г-П+/30х100, ПеН-1Г-П+/40х40, ПеН-1Г-П+/40х50, ПеН-1Г-П+/40х60, ПеН-1Г-П+/40х70, ПеН-1Г-П+/40х80, ПеН-1Г-П+/40х90, ПеН-1Г-П+/40х100, ПеН-1Г-П+/50х50, ПеН-1Г-П+/50х60, ПеН-1Г-П+/50х70, ПеН-1Г-П+/50х80, ПеН-1Г-П+/50х90, ПеН-1Г-П+/50х100, ПеН-1Г-П+/60х60, ПеН-1Г-П+/60х70, ПеН-1Г-П+/60х80, ПеН-1Г-П+/60х90, ПеН-1Г-П+/60х100, ПеН-1Г-П+/70х70, ПеН-1Г-П+/70х80, ПеН-1Г-П+/70х90, ПеН-1Г-П+/80х80, ПеН-1Г-П+/80х90. 49. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-1Ж-Э/30х50, ПеН-1Ж-Э/30х60, ПеН-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	1Ж-Э/30х70, ПеН-1Ж-Э/30х80, ПеН-1Ж-Э/30х90, ПеН-1Ж-Э/30х100, ПеН-1Ж-Э/40х40, ПеН-1Ж-Э/40х50, ПеН-1Ж-Э/40х60, ПеН-1Ж-Э/40х70, ПеН-1Ж-Э/40х80, ПеН-1Ж-Э/40х90, ПеН-1Ж-Э/40х100, ПеН-1Ж-Э/50х50, ПеН-1Ж-Э/50х60, ПеН-1Ж-Э/50х70, ПеН-1Ж-Э/50х80, ПеН-1Ж-Э/50х90, ПеН-1Ж-Э/50х100, ПеН-1Ж-Э/60х60, ПеН-1Ж-Э/60х70, ПеН-1Ж-Э/60х80, ПеН-1Ж-Э/60х90, ПеН-1Ж-Э/60х100, ПеН-1Ж-Э/70х70, ПеН-1Ж-Э/70х80, ПеН-1Ж-Э/70х90, ПеН-1Ж-Э/80х80, ПеН-1Ж-Э/80х90. 50. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-1Ж-С/30х50, ПеН-1Ж-С/30х60, ПеН-1Ж-С/30х70, ПеН-1Ж-С/30х80, ПеН-1Ж-С/30х90, ПеН-1Ж-С/30х100, ПеН-1Ж-С/40х40, ПеН-1Ж-С/40х50, ПеН-1Ж-С/40х60, ПеН-1Ж-С/40х70, ПеН-1Ж-С/40х80, ПеН-1Ж-С/40х90, ПеН-1Ж-С/40х100, ПеН-1Ж-С/50х50, ПеН-1Ж-С/50х60, ПеН-1Ж-С/50х70, ПеН-1Ж-С/50х80, ПеН-1Ж-С/50х90, ПеН-1Ж-С/50х100, ПеН-1Ж-С/60х60, ПеН-1Ж-С/60х70, ПеН-1Ж-С/60х80, ПеН-1Ж-С/60х90, ПеН-1Ж-С/60х100, ПеН-1Ж-С/70х70, ПеН-1Ж-С/70х80, ПеН-1Ж-С/70х90, ПеН-1Ж-С/80х80, ПеН-1Ж-С/80х90. 51. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-1Ж-К/30х50, ПеН-1Ж-К/30х60, ПеН-1Ж-К/30х70, ПеН-1Ж-К/30х80, ПеН-1Ж-К/30х90, ПеН-1Ж-К/30х100, ПеН-1Ж-К/40х40, ПеН-1Ж-К/40х50, ПеН-1Ж-К/40х60, ПеН-1Ж-К/40х70, ПеН-1Ж-К/40х80, ПеН-1Ж-К/40х90, ПеН-1Ж-К/40х100, ПеН-1Ж-К/50х50, ПеН-1Ж-К/50х60, ПеН-1Ж-К/50х70, ПеН-1Ж-К/50х80, ПеН-1Ж-К/50х90, ПеН-1Ж-К/50х100, ПеН-1Ж-К/60х60, ПеН-1Ж-К/60х70, ПеН-1Ж-К/60х80, ПеН-1Ж-К/60х90, ПеН-1Ж-К/60х100, ПеН-1Ж-К/70х70, ПеН-1Ж-К/70х80, ПеН-1Ж-К/70х90, ПеН-1Ж-К/80х80, ПеН-1Ж-К/80х90. 52. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-1Ж-К+/30х50, ПеН-1Ж-К+/30х60, ПеН-1Ж-К+/30х70, ПеН-1Ж-К+/30х80, ПеН-1Ж-К+/30х90, ПеН-1Ж-К+/30х100, ПеН-1Ж-К+/40х40, ПеН-1Ж-К+/40х50, ПеН-1Ж-К+/40х60, ПеН-1Ж-К+/40х70, ПеН-1Ж-К+/40х80, ПеН-1Ж-К+/40х90, ПеН-1Ж-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	К+/40х100, ПеН-1Ж-К+/50х50, ПеН-1Ж-К+/50х60, ПеН-1Ж-К+/50х70, ПеН-1Ж-К+/50х80, ПеН-1Ж-К+/50х90, ПеН-1Ж-К+/50х100, ПеН-1Ж-К+/60х60, ПеН-1Ж-К+/60х70, ПеН-1Ж-К+/60х80, ПеН-1Ж-К+/60х90, ПеН-1Ж-К+/60х100, ПеН-1Ж-К+/70х70, ПеН-1Ж-К+/70х80, ПеН-1Ж-К+/70х90, ПеН-1Ж-К+/80х80, ПеН-1Ж-К+/80х90. 53. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-1Ж-П/30х50, ПеН-1Ж-П/30х60, ПеН-1Ж-П/30х70, ПеН-1Ж-П/30х80, ПеН-1Ж-П/30х90, ПеН-1Ж-П/30х100, ПеН-1Ж-П/40х40, ПеН-1Ж-П/40х50, ПеН-1Ж-П/40х60, ПеН-1Ж-П/40х70, ПеН-1Ж-П/40х80, ПеН-1Ж-П/40х90, ПеН-1Ж-П/40х100, ПеН-1Ж-П/50х50, ПеН-1Ж-П/50х60, ПеН-1Ж-П/50х70, ПеН-1Ж-П/50х80, ПеН-1Ж-П/50х90, ПеН-1Ж-П/50х100, ПеН-1Ж-П/60х60, ПеН-1Ж-П/60х70, ПеН-1Ж-П/60х80, ПеН-1Ж-П/60х90, ПеН-1Ж-П/60х100, ПеН-1Ж-П/70х70, ПеН-1Ж-П/70х80, ПеН-1Ж-П/70х90, ПеН-1Ж-П/80х80, ПеН-1Ж-П/80х90. 54. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-1Ж-П+/30х50, ПеН-1Ж-П+/30х60, ПеН-1Ж-П+/30х70, ПеН-1Ж-П+/30х80, ПеН-1Ж-П+/30х90, ПеН-1Ж-П+/30х100, ПеН-1Ж-П+/40х40, ПеН-1Ж-П+/40х50, ПеН-1Ж-П+/40х60, ПеН-1Ж-П+/40х70, ПеН-1Ж-П+/40х80, ПеН-1Ж-П+/40х90, ПеН-1Ж-П+/40х100, ПеН-1Ж-П+/50х50, ПеН-1Ж-П+/50х60, ПеН-1Ж-П+/50х70, ПеН-1Ж-П+/50х80, ПеН-1Ж-П+/50х90, ПеН-1Ж-П+/50х100, ПеН-1Ж-П+/60х60, ПеН-1Ж-П+/60х70, ПеН-1Ж-П+/60х80, ПеН-1Ж-П+/60х90, ПеН-1Ж-П+/60х100, ПеН-1Ж-П+/70х70, ПеН-1Ж-П+/70х80, ПеН-1Ж-П+/70х90, ПеН-1Ж-П+/80х80, ПеН-1Ж-П+/80х90. 55. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-1Р-Э/30х50, ПеН-1Р-Э/30х60, ПеН-1Р-Э/30х70, ПеН-1Р-Э/30х80, ПеН-1Р-Э/30х90, ПеН-1Р-Э/30х100, ПеН-1Р-Э/40х40, ПеН-1Р-Э/40х50, ПеН-1Р-Э/40х60, ПеН-1Р-Э/40х70, ПеН-1Р-Э/40х80, ПеН-1Р-Э/40х90, ПеН-1Р-Э/40х100, ПеН-1Р-Э/50х50, ПеН-1Р-Э/50х60,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ПеН-1Р-Э/50х70, ПеН-1Р-Э/50х80, ПеН-1Р-Э/50х90, ПеН-1Р-Э/50х100, ПеН-1Р-Э/60х60, ПеН-1Р-Э/60х70, ПеН-1Р-Э/60х80, ПеН-1Р-Э/60х90, ПеН-1Р-Э/60х100, ПеН-1Р-Э/70х70, ПеН-1Р-Э/70х80, ПеН-1Р-Э/70х90, ПеН-1Р-Э/80х80, ПеН-1Р-Э/80х90. 56. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-1Р-С/30х50, ПеН-1Р-С/30х60, ПеН-1Р-С/30х70, ПеН-1Р-С/30х80, ПеН-1Р-С/30х90, ПеН-1Р-С/30х100, ПеН-1Р-С/40х40, ПеН-1Р-С/40х50, ПеН-1Р-С/40х60, ПеН-1Р-С/40х70, ПеН-1Р-С/40х80, ПеН-1Р-С/40х90, ПеН-1Р-С/40х100, ПеН-1Р-С/50х50, ПеН-1Р-С/50х60, ПеН-1Р-С/50х70, ПеН-1Р-С/50х80, ПеН-1Р-С/50х90, ПеН-1Р-С/50х100, ПеН-1Р-С/60х60, ПеН-1Р-С/60х70, ПеН-1Р-С/60х80, ПеН-1Р-С/60х90, ПеН-1Р-С/60х100, ПеН-1Р-С/70х70, ПеН-1Р-С/70х80, ПеН-1Р-С/70х90, ПеН-1Р-С/80х80, ПеН-1Р-С/80х90. 57. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-1Р-К/30х50, ПеН-1Р-К/30х60, ПеН-1Р-К/30х70, ПеН-1Р-К/30х80, ПеН-1Р-К/30х90, ПеН-1Р-К/30х100, ПеН-1Р-К/40х40, ПеН-1Р-К/40х50, ПеН-1Р-К/40х60, ПеН-1Р-К/40х70, ПеН-1Р-К/40х80, ПеН-1Р-К/40х90, ПеН-1Р-К/40х100, ПеН-1Р-К/50х50, ПеН-1Р-К/50х60, ПеН-1Р-К/50х70, ПеН-1Р-К/50х80, ПеН-1Р-К/50х90, ПеН-1Р-К/50х100, ПеН-1Р-К/60х60, ПеН-1Р-К/60х70, ПеН-1Р-К/60х80, ПеН-1Р-К/60х90, ПеН-1Р-К/60х100, ПеН-1Р-К/70х70, ПеН-1Р-К/70х80, ПеН-1Р-К/70х90, ПеН-1Р-К/80х80, ПеН-1Р-К/80х90. 58. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-1Р-К+/30х50, ПеН-1Р-К+/30х60, ПеН-1Р-К+/30х70, ПеН-1Р-К+/30х80, ПеН-1Р-К+/30х90, ПеН-1Р-К+/30х100, ПеН-1Р-К+/40х40, ПеН-1Р-К+/40х50, ПеН-1Р-К+/40х60, ПеН-1Р-К+/40х70, ПеН-1Р-К+/40х80, ПеН-1Р-К+/40х90, ПеН-1Р-К+/40х100, ПеН-1Р-К+/50х50, ПеН-1Р-К+/50х60, ПеН-1Р-К+/50х70, ПеН-1Р-К+/50х80, ПеН-1Р-К+/50х90, ПеН-1Р-К+/50х100, ПеН-1Р-К+/60х60, ПеН-1Р-К+/60х70, ПеН-1Р-К+/60х80, ПеН-1Р-К+/60х90, ПеН-1Р-К+/60х100, ПеН-1Р-К+/70х70, ПеН-1Р-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	К+/70х80, ПеН-1Р-К+/70х90, ПеН-1Р-К+/80х80, ПеН-1Р-К+/80х90. 59. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-1Р-П/30х50, ПеН-1Р-П/30х60, ПеН-1Р-П/30х70, ПеН-1Р-П/30х80, ПеН-1Р-П/30х90, ПеН-1Р-П/30х100, ПеН-1Р-П/40х40, ПеН-1Р-П/40х50, ПеН-1Р-П/40х60, ПеН-1Р-П/40х70, ПеН-1Р-П/40х80, ПеН-1Р-П/40х90, ПеН-1Р-П/40х100, ПеН-1Р-П/50х50, ПеН-1Р-П/50х60, ПеН-1Р-П/50х70, ПеН-1Р-П/50х80, ПеН-1Р-П/50х90, ПеН-1Р-П/50х100, ПеН-1Р-П/60х60, ПеН-1Р-П/60х70, ПеН-1Р-П/60х80, ПеН-1Р-П/60х90, ПеН-1Р-П/60х100, ПеН-1Р-П/70х70, ПеН-1Р-П/70х80, ПеН-1Р-П/70х90, ПеН-1Р-П/80х80, ПеН-1Р-П/80х90. 60. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-1Р-П+/30х50, ПеН-1Р-П+/30х60, ПеН-1Р-П+/30х70, ПеН-1Р-П+/30х80, ПеН-1Р-П+/30х90, ПеН-1Р-П+/30х100, ПеН-1Р-П+/40х40, ПеН-1Р-П+/40х50, ПеН-1Р-П+/40х60, ПеН-1Р-П+/40х70, ПеН-1Р-П+/40х80, ПеН-1Р-П+/40х90, ПеН-1Р-П+/40х100, ПеН-1Р-П+/50х50, ПеН-1Р-П+/50х60, ПеН-1Р-П+/50х70, ПеН-1Р-П+/50х80, ПеН-1Р-П+/50х90, ПеН-1Р-П+/50х100, ПеН-1Р-П+/60х60, ПеН-1Р-П+/60х70, ПеН-1Р-П+/60х80, ПеН-1Р-П+/60х90, ПеН-1Р-П+/60х100, ПеН-1Р-П+/70х70, ПеН-1Р-П+/70х80, ПеН-1Р-П+/70х90, ПеН-1Р-П+/80х80, ПеН-1Р-П+/80х90. 61. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-13-Э/30х50, ПеН-13-Э/30х60, ПеН-13-Э/30х70, ПеН-13-Э/30х80, ПеН-13-Э/30х90, ПеН-13-Э/30х100, ПеН-13-Э/40х40, ПеН-13-Э/40х50, ПеН-13-Э/40х60, ПеН-13-Э/40х70, ПеН-13-Э/40х80, ПеН-13-Э/40х90, ПеН-13-Э/40х100, ПеН-13-Э/50х50, ПеН-13-Э/50х60, ПеН-13-Э/50х70, ПеН-13-Э/50х80, ПеН-13-Э/50х90, ПеН-13-Э/50х100, ПеН-13-Э/60х60, ПеН-13-Э/60х70, ПеН-13-Э/60х80, ПеН-13-Э/60х90, ПеН-13-Э/60х100, ПеН-13-Э/70х70, ПеН-13-Э/70х80, ПеН-13-Э/70х90, ПеН-13-Э/80х80, ПеН-13-Э/80х90. 62. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	СМС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-13-С/30х50, ПеН-13-С/30х60, ПеН-13-С/30х70, ПеН-13-С/30х80, ПеН-13-С/30х90, ПеН-13-С/30х100, ПеН-13-С/40х40, ПеН-13-С/40х50, ПеН-13-С/40х60, ПеН-13-С/40х70, ПеН-13-С/40х80, ПеН-13-С/40х90, ПеН-13-С/40х100, ПеН-13-С/50х50, ПеН-13-С/50х60, ПеН-13-С/50х70, ПеН-13-С/50х80, ПеН-13-С/50х90, ПеН-13-С/50х100, ПеН-13-С/60х60, ПеН-13-С/60х70, ПеН-13-С/60х80, ПеН-13-С/60х90, ПеН-13-С/60х100, ПеН-13-С/70х70, ПеН-13-С/70х80, ПеН-13-С/70х90, ПеН-13-С/80х80, ПеН-13-С/80х90. 63. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-13-К/30х50, ПеН-13-К/30х60, ПеН-13-К/30х70, ПеН-13-К/30х80, ПеН-13-К/30х90, ПеН-13-К/30х100, ПеН-13-К/40х40, ПеН-13-К/40х50, ПеН-13-К/40х60, ПеН-13-К/40х70, ПеН-13-К/40х80, ПеН-13-К/40х90, ПеН-13-К/40х100, ПеН-13-К/50х50, ПеН-13-К/50х60, ПеН-13-К/50х70, ПеН-13-К/50х80, ПеН-13-К/50х90, ПеН-13-К/50х100, ПеН-13-К/60х60, ПеН-13-К/60х70, ПеН-13-К/60х80, ПеН-13-К/60х90, ПеН-13-К/60х100, ПеН-13-К/70х70, ПеН-13-К/70х80, ПеН-13-К/70х90, ПеН-13-К/80х80, ПеН-13-К/80х90. 64. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-13-К+/30х50, ПеН-13-К+/30х60, ПеН-13-К+/30х70, ПеН-13-К+/30х80, ПеН-13-К+/30х90, ПеН-13-К+/30х100, ПеН-13-К+/40х40, ПеН-13-К+/40х50, ПеН-13-К+/40х60, ПеН-13-К+/40х70, ПеН-13-К+/40х80, ПеН-13-К+/40х90, ПеН-13-К+/40х100, ПеН-13-К+/50х50, ПеН-13-К+/50х60, ПеН-13-К+/50х70, ПеН-13-К+/50х80, ПеН-13-К+/50х90, ПеН-13-К+/50х100, ПеН-13-К+/60х60, ПеН-13-К+/60х70, ПеН-13-К+/60х80, ПеН-13-К+/60х90, ПеН-13-К+/60х100, ПеН-13-К+/70х70, ПеН-13-К+/70х80, ПеН-13-К+/70х90, ПеН-13-К+/80х80, ПеН-13-К+/80х90. 65. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-13-П/30х50, ПеН-13-П/30х60, ПеН-13-П/30х70, ПеН-13-П/30х80, ПеН-13-П/30х90, ПеН-13-П/30х100, ПеН-13-П/40х40, ПеН-13-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	П/40х50, ПеН-13-П/40х60, ПеН-13-П/40х70, ПеН-13-П/40х80, ПеН-13-П/40х90, ПеН-13-П/40х100, ПеН-13-П/50х50, ПеН-13-П/50х60, ПеН-13-П/50х70, ПеН-13-П/50х80, ПеН-13-П/50х90, ПеН-13-П/50х100, ПеН-13-П/60х60, ПеН-13-П/60х70, ПеН-13-П/60х80, ПеН-13-П/60х90, ПеН-13-П/60х100, ПеН-13-П/70х70, ПеН-13-П/70х80, ПеН-13-П/70х90, ПеН-13-П/80х80, ПеН-13-П/80х90. 66. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-13-П+/30х50, ПеН-13-П+/30х60, ПеН-13-П+/30х70, ПеН-13-П+/30х80, ПеН-13-П+/30х90, ПеН-13-П+/30х100, ПеН-13-П+/40х40, ПеН-13-П+/40х50, ПеН-13-П+/40х60, ПеН-13-П+/40х70, ПеН-13-П+/40х80, ПеН-13-П+/40х90, ПеН-13-П+/40х100, ПеН-13-П+/50х50, ПеН-13-П+/50х60, ПеН-13-П+/50х70, ПеН-13-П+/50х80, ПеН-13-П+/50х90, ПеН-13-П+/50х100, ПеН-13-П+/60х60, ПеН-13-П+/60х70, ПеН-13-П+/60х80, ПеН-13-П+/60х90, ПеН-13-П+/60х100, ПеН-13-П+/70х70, ПеН-13-П+/70х80, ПеН-13-П+/70х90, ПеН-13-П+/80х80, ПеН-13-П+/80х90. 67. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-1Ф-Э/30х50, ПеН-1Ф-Э/30х60, ПеН-1Ф-Э/30х70, ПеН-1Ф-Э/30х80, ПеН-1Ф-Э/30х90, ПеН-1Ф-Э/30х100, ПеН-1Ф-Э/40х40, ПеН-1Ф-Э/40х50, ПеН-1Ф-Э/40х60, ПеН-1Ф-Э/40х70, ПеН-1Ф-Э/40х80, ПеН-1Ф-Э/40х90, ПеН-1Ф-Э/40х100, ПеН-1Ф-Э/50х50, ПеН-1Ф-Э/50х60, ПеН-1Ф-Э/50х70, ПеН-1Ф-Э/50х80, ПеН-1Ф-Э/50х90, ПеН-1Ф-Э/50х100, ПеН-1Ф-Э/60х60, ПеН-1Ф-Э/60х70, ПеН-1Ф-Э/60х80, ПеН-1Ф-Э/60х90, ПеН-1Ф-Э/60х100, ПеН-1Ф-Э/70х70, ПеН-1Ф-Э/70х80, ПеН-1Ф-Э/70х90, ПеН-1Ф-Э/80х80, ПеН-1Ф-Э/80х90. 68. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-1Ф-С/30х50, ПеН-1Ф-С/30х60, ПеН-1Ф-С/30х70, ПеН-1Ф-С/30х80, ПеН-1Ф-С/30х90, ПеН-1Ф-С/30х100, ПеН-1Ф-С/40х40, ПеН-1Ф-С/40х50, ПеН-1Ф-С/40х60, ПеН-1Ф-С/40х70, ПеН-1Ф-С/40х80, ПеН-1Ф-С/40х90, ПеН-1Ф-С/40х100, ПеН-1Ф-С/50х50, ПеН-1Ф-С/50х60, ПеН-1Ф-С/50х70, ПеН-1Ф-С/50х80, ПеН-1Ф-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	С/50х90, ПеН-1Ф-С/50х100, ПеН-1Ф-С/60х60, ПеН-1Ф-С/60х70, ПеН-1Ф-С/60х80, ПеН-1Ф-С/60х90, ПеН-1Ф-С/60х100, ПеН-1Ф-С/70х70, ПеН-1Ф-С/70х80, ПеН-1Ф-С/70х90, ПеН-1Ф-С/80х80, ПеН-1Ф-С/80х90. 69. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-1Ф-К/30х50, ПеН-1Ф-К/30х60, ПеН-1Ф-К/30х70, ПеН-1Ф-К/30х80, ПеН-1Ф-К/30х90, ПеН-1Ф-К/30х100, ПеН-1Ф-К/40х40, ПеН-1Ф-К/40х50, ПеН-1Ф-К/40х60, ПеН-1Ф-К/40х70, ПеН-1Ф-К/40х80, ПеН-1Ф-К/40х90, ПеН-1Ф-К/40х100, ПеН-1Ф-К/50х50, ПеН-1Ф-К/50х60, ПеН-1Ф-К/50х70, ПеН-1Ф-К/50х80, ПеН-1Ф-К/50х90, ПеН-1Ф-К/50х100, ПеН-1Ф-К/60х60, ПеН-1Ф-К/60х70, ПеН-1Ф-К/60х80, ПеН-1Ф-К/60х90, ПеН-1Ф-К/60х100, ПеН-1Ф-К/70х70, ПеН-1Ф-К/70х80, ПеН-1Ф-К/70х90, ПеН-1Ф-К/80х80, ПеН-1Ф-К/80х90. 70. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-1Ф-К+/30х50, ПеН-1Ф-К+/30х60, ПеН-1Ф-К+/30х70, ПеН-1Ф-К+/30х80, ПеН-1Ф-К+/30х90, ПеН-1Ф-К+/30х100, ПеН-1Ф-К+/40х40, ПеН-1Ф-К+/40х50, ПеН-1Ф-К+/40х60, ПеН-1Ф-К+/40х70, ПеН-1Ф-К+/40х80, ПеН-1Ф-К+/40х90, ПеН-1Ф-К+/40х100, ПеН-1Ф-К+/50х50, ПеН-1Ф-К+/50х60, ПеН-1Ф-К+/50х70, ПеН-1Ф-К+/50х80, ПеН-1Ф-К+/50х90, ПеН-1Ф-К+/50х100, ПеН-1Ф-К+/60х60, ПеН-1Ф-К+/60х70, ПеН-1Ф-К+/60х80, ПеН-1Ф-К+/60х90, ПеН-1Ф-К+/60х100, ПеН-1Ф-К+/70х70, ПеН-1Ф-К+/70х80, ПеН-1Ф-К+/70х90, ПеН-1Ф-К+/80х80, ПеН-1Ф-К+/80х90. 71. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-1Ф-П/30х50, ПеН-1Ф-П/30х60, ПеН-1Ф-П/30х70, ПеН-1Ф-П/30х80, ПеН-1Ф-П/30х90, ПеН-1Ф-П/30х100, ПеН-1Ф-П/40х40, ПеН-1Ф-П/40х50, ПеН-1Ф-П/40х60, ПеН-1Ф-П/40х70, ПеН-1Ф-П/40х80, ПеН-1Ф-П/40х90, ПеН-1Ф-П/40х100, ПеН-1Ф-П/50х50, ПеН-1Ф-П/50х60, ПеН-1Ф-П/50х70, ПеН-1Ф-П/50х80, ПеН-1Ф-П/50х90, ПеН-1Ф-П/50х100, ПеН-1Ф-П/60х60, ПеН-1Ф-П/60х70, ПеН-1Ф-П/60х80,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ПеН-1Ф-П/60х90, ПеН-1Ф-П/60х100, ПеН-1Ф-П/70х70, ПеН-1Ф-П/70х80, ПеН-1Ф-П/70х90, ПеН-1Ф-П/80х80, ПеН-1Ф-П/80х90. 72. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа СМС, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-1Ф-П+/30х50, ПеН-1Ф-П+/30х60, ПеН-1Ф-П+/30х70, ПеН-1Ф-П+/30х80, ПеН-1Ф-П+/30х90, ПеН-1Ф-П+/30х100, ПеН-1Ф-П+/40х40, ПеН-1Ф-П+/40х50, ПеН-1Ф-П+/40х60, ПеН-1Ф-П+/40х70, ПеН-1Ф-П+/40х80, ПеН-1Ф-П+/40х90, ПеН-1Ф-П+/40х100, ПеН-1Ф-П+/50х50, ПеН-1Ф-П+/50х60, ПеН-1Ф-П+/50х70, ПеН-1Ф-П+/50х80, ПеН-1Ф-П+/50х90, ПеН-1Ф-П+/50х100, ПеН-1Ф-П+/60х60, ПеН-1Ф-П+/60х70, ПеН-1Ф-П+/60х80, ПеН-1Ф-П+/60х90, ПеН-1Ф-П+/60х100, ПеН-1Ф-П+/70х70, ПеН-1Ф-П+/70х80, ПеН-1Ф-П+/70х90, ПеН-1Ф-П+/80х80, ПеН-1Ф-П+/80х90. 73. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-2Б-Э/30х50, ПеН-2Б-Э/30х60, ПеН-2Б-Э/30х70, ПеН-2Б-Э/30х80, ПеН-2Б-Э/30х90, ПеН-2Б-Э/30х100, ПеН-2Б-Э/40х40, ПеН-2Б-Э/40х50, ПеН-2Б-Э/40х60, ПеН-2Б-Э/40х70, ПеН-2Б-Э/40х80, ПеН-2Б-Э/40х90, ПеН-2Б-Э/40х100, ПеН-2Б-Э/50х50, ПеН-2Б-Э/50х60, ПеН-2Б-Э/50х70, ПеН-2Б-Э/50х80, ПеН-2Б-Э/50х90, ПеН-2Б-Э/50х100, ПеН-2Б-Э/60х60, ПеН-2Б-Э/60х70, ПеН-2Б-Э/60х80, ПеН-2Б-Э/60х90, ПеН-2Б-Э/60х100, ПеН-2Б-Э/70х70, ПеН-2Б-Э/70х80, ПеН-2Б-Э/70х90, ПеН-2Б-Э/80х80, ПеН-2Б-Э/80х90. 74. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-2Б-С/30х50, ПеН-2Б-С/30х60, ПеН-2Б-С/30х70, ПеН-2Б-С/30х80, ПеН-2Б-С/30х90, ПеН-2Б-С/30х100, ПеН-2Б-С/40х40, ПеН-2Б-С/40х50, ПеН-2Б-С/40х60, ПеН-2Б-С/40х70, ПеН-2Б-С/40х80, ПеН-2Б-С/40х90, ПеН-2Б-С/40х100, ПеН-2Б-С/50х50, ПеН-2Б-С/50х60, ПеН-2Б-С/50х70, ПеН-2Б-С/50х80, ПеН-2Б-С/50х90, ПеН-2Б-С/50х100, ПеН-2Б-С/60х60, ПеН-2Б-С/60х70, ПеН-2Б-С/60х80, ПеН-2Б-С/60х90, ПеН-2Б-С/60х100, ПеН-2Б-С/70х70, ПеН-2Б-С/70х80, ПеН-2Б-С/70х90, ПеН-2Б-С/80х80, ПеН-2Б-С/80х90.		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	75. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-2Б-К/30х50, ПеН-2Б-К/30х60, ПеН-2Б-К/30х70, ПеН-2Б-К/30х80, ПеН-2Б-К/30х90, ПеН-2Б-К/30х100, ПеН-2Б-К/40х40, ПеН-2Б-К/40х50, ПеН-2Б-К/40х60, ПеН-2Б-К/40х70, ПеН-2Б-К/40х80, ПеН-2Б-К/40х90, ПеН-2Б-К/40х100, ПеН-2Б-К/50х50, ПеН-2Б-К/50х60, ПеН-2Б-К/50х70, ПеН-2Б-К/50х80, ПеН-2Б-К/50х90, ПеН-2Б-К/50х100, ПеН-2Б-К/60х60, ПеН-2Б-К/60х70, ПеН-2Б-К/60х80, ПеН-2Б-К/60х90, ПеН-2Б-К/60х100, ПеН-2Б-К/70х70, ПеН-2Б-К/70х80, ПеН-2Б-К/70х90, ПеН-2Б-К/80х80, ПеН-2Б-К/80х90. 76. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-2Б-К+/30х50, ПеН-2Б-К+/30х60, ПеН-2Б-К+/30х70, ПеН-2Б-К+/30х80, ПеН-2Б-К+/30х90, ПеН-2Б-К+/30х100, ПеН-2Б-К+/40х40, ПеН-2Б-К+/40х50, ПеН-2Б-К+/40х60, ПеН-2Б-К+/40х70, ПеН-2Б-К+/40х80, ПеН-2Б-К+/40х90, ПеН-2Б-К+/40х100, ПеН-2Б-К+/50х50, ПеН-2Б-К+/50х60, ПеН-2Б-К+/50х70, ПеН-2Б-К+/50х80, ПеН-2Б-К+/50х90, ПеН-2Б-К+/50х100, ПеН-2Б-К+/60х60, ПеН-2Б-К+/60х70, ПеН-2Б-К+/60х80, ПеН-2Б-К+/60х90, ПеН-2Б-К+/60х100, ПеН-2Б-К+/70х70, ПеН-2Б-К+/70х80, ПеН-2Б-К+/70х90, ПеН-2Б-К+/80х80, ПеН-2Б-К+/80х90. 77. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-2Б-П/30х50, ПеН-2Б-П/30х60, ПеН-2Б-П/30х70, ПеН-2Б-П/30х80, ПеН-2Б-П/30х90, ПеН-2Б-П/30х100, ПеН-2Б-П/40х40, ПеН-2Б-П/40х50, ПеН-2Б-П/40х60, ПеН-2Б-П/40х70, ПеН-2Б-П/40х80, ПеН-2Б-П/40х90, ПеН-2Б-П/40х100, ПеН-2Б-П/50х50, ПеН-2Б-П/50х60, ПеН-2Б-П/50х70, ПеН-2Б-П/50х80, ПеН-2Б-П/50х90, ПеН-2Б-П/50х100, ПеН-2Б-П/60х60, ПеН-2Б-П/60х70, ПеН-2Б-П/60х80, ПеН-2Б-П/60х90, ПеН-2Б-П/60х100, ПеН-2Б-П/70х70, ПеН-2Б-П/70х80, ПеН-2Б-П/70х90, ПеН-2Б-П/80х80, ПеН-2Б-П/80х90. 78. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-2Б-П+/30х50, ПеН-2Б-П+/30х60, ПеН-2Б-П+/30х70,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ПеН-2Б-П+/30х80, ПеН-2Б-П+/30х90, ПеН-2Б-П+/30х100, ПеН-2Б-П+/40х40, ПеН-2Б-П+/40х50, ПеН-2Б-П+/40х60, ПеН-2Б-П+/40х70, ПеН-2Б-П+/40х80, ПеН-2Б-П+/40х90, ПеН-2Б-П+/40х100, ПеН-2Б-П+/50х50, ПеН-2Б-П+/50х60, ПеН-2Б-П+/50х70, ПеН-2Б-П+/50х80, ПеН-2Б-П+/50х90, ПеН-2Б-П+/50х100, ПеН-2Б-П+/60х60, ПеН-2Б-П+/60х70, ПеН-2Б-П+/60х80, ПеН-2Б-П+/60х90, ПеН-2Б-П+/60х100, ПеН-2Б-П+/70х70, ПеН-2Б-П+/70х80, ПеН-2Б-П+/70х90, ПеН-2Б-П+/80х80, ПеН-2Б-П+/80х90. 79. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-2Г-Э/30х50, ПеН-2Г-Э/30х60, ПеН-2Г-Э/30х70, ПеН-2Г-Э/30х80, ПеН-2Г-Э/30х90, ПеН-2Г-Э/30х100, ПеН-2Г-Э/40х40, ПеН-2Г-Э/40х50, ПеН-2Г-Э/40х60, ПеН-2Г-Э/40х70, ПеН-2Г-Э/40х80, ПеН-2Г-Э/40х90, ПеН-2Г-Э/40х100, ПеН-2Г-Э/50х50, ПеН-2Г-Э/50х60, ПеН-2Г-Э/50х70, ПеН-2Г-Э/50х80, ПеН-2Г-Э/50х90, ПеН-2Г-Э/50х100, ПеН-2Г-Э/60х60, ПеН-2Г-Э/60х70, ПеН-2Г-Э/60х80, ПеН-2Г-Э/60х90, ПеН-2Г-Э/60х100, ПеН-2Г-Э/70х70, ПеН-2Г-Э/70х80, ПеН-2Г-Э/70х90, ПеН-2Г-Э/80х80, ПеН-2Г-Э/80х90. 80. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-2Г-С/30х50, ПеН-2Г-С/30х60, ПеН-2Г-С/30х70, ПеН-2Г-С/30х80, ПеН-2Г-С/30х90, ПеН-2Г-С/30х100, ПеН-2Г-С/40х40, ПеН-2Г-С/40х50, ПеН-2Г-С/40х60, ПеН-2Г-С/40х70, ПеН-2Г-С/40х80, ПеН-2Г-С/40х90, ПеН-2Г-С/40х100, ПеН-2Г-С/50х50, ПеН-2Г-С/50х60, ПеН-2Г-С/50х70, ПеН-2Г-С/50х80, ПеН-2Г-С/50х90, ПеН-2Г-С/50х100, ПеН-2Г-С/60х60, ПеН-2Г-С/60х70, ПеН-2Г-С/60х80, ПеН-2Г-С/60х90, ПеН-2Г-С/60х100, ПеН-2Г-С/70х70, ПеН-2Г-С/70х80, ПеН-2Г-С/70х90, ПеН-2Г-С/80х80, ПеН-2Г-С/80х90. 81. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-2Г-К/30х50, ПеН-2Г-К/30х60, ПеН-2Г-К/30х70, ПеН-2Г-К/30х80, ПеН-2Г-К/30х90, ПеН-2Г-К/30х100, ПеН-2Г-К/40х40, ПеН-2Г-К/40х50, ПеН-2Г-К/40х60, ПеН-2Г-К/40х70, ПеН-2Г-К/40х80, ПеН-2Г-К/40х90, ПеН-2Г-К/40х100, ПеН-2Г-К/50х50, ПеН-2Г-К/50х60, ПеН-2Г-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	К/50х70, ПеН-2Г-К/50х80, ПеН-2Г-К/50х90, ПеН-2Г-К/50х100, ПеН-2Г-К/60х60, ПеН-2Г-К/60х70, ПеН-2Г-К/60х80, ПеН-2Г-К/60х90, ПеН-2Г-К/60х100, ПеН-2Г-К/70х70, ПеН-2Г-К/70х80, ПеН-2Г-К/70х90, ПеН-2Г-К/80х80, ПеН-2Г-К/80х90. 82. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-2Г-К+/30х50, ПеН-2Г-К+/30х60, ПеН-2Г-К+/30х70, ПеН-2Г-К+/30х80, ПеН-2Г-К+/30х90, ПеН-2Г-К+/30х100, ПеН-2Г-К+/40х40, ПеН-2Г-К+/40х50, ПеН-2Г-К+/40х60, ПеН-2Г-К+/40х70, ПеН-2Г-К+/40х80, ПеН-2Г-К+/40х90, ПеН-2Г-К+/40х100, ПеН-2Г-К+/50х50, ПеН-2Г-К+/50х60, ПеН-2Г-К+/50х70, ПеН-2Г-К+/50х80, ПеН-2Г-К+/50х90, ПеН-2Г-К+/50х100, ПеН-2Г-К+/60х60, ПеН-2Г-К+/60х70, ПеН-2Г-К+/60х80, ПеН-2Г-К+/60х90, ПеН-2Г-К+/60х100, ПеН-2Г-К+/70х70, ПеН-2Г-К+/70х80, ПеН-2Г-К+/70х90, ПеН-2Г-К+/80х80, ПеН-2Г-К+/80х90. 83. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-2Г-П/30х50, ПеН-2Г-П/30х60, ПеН-2Г-П/30х70, ПеН-2Г-П/30х80, ПеН-2Г-П/30х90, ПеН-2Г-П/30х100, ПеН-2Г-П/40х40, ПеН-2Г-П/40х50, ПеН-2Г-П/40х60, ПеН-2Г-П/40х70, ПеН-2Г-П/40х80, ПеН-2Г-П/40х90, ПеН-2Г-П/40х100, ПеН-2Г-П/50х50, ПеН-2Г-П/50х60, ПеН-2Г-П/50х70, ПеН-2Г-П/50х80, ПеН-2Г-П/50х90, ПеН-2Г-П/50х100, ПеН-2Г-П/60х60, ПеН-2Г-П/60х70, ПеН-2Г-П/60х80, ПеН-2Г-П/60х90, ПеН-2Г-П/60х100, ПеН-2Г-П/70х70, ПеН-2Г-П/70х80, ПеН-2Г-П/70х90, ПеН-2Г-П/80х80, ПеН-2Г-П/80х90. 84. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, голубого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-2Г-П+/30х50, ПеН-2Г-П+/30х60, ПеН-2Г-П+/30х70, ПеН-2Г-П+/30х80, ПеН-2Г-П+/30х90, ПеН-2Г-П+/30х100, ПеН-2Г-П+/40х40, ПеН-2Г-П+/40х50, ПеН-2Г-П+/40х60, ПеН-2Г-П+/40х70, ПеН-2Г-П+/40х80, ПеН-2Г-П+/40х90, ПеН-2Г-П+/40х100, ПеН-2Г-П+/50х50, ПеН-2Г-П+/50х60, ПеН-2Г-П+/50х70, ПеН-2Г-П+/50х80, ПеН-2Г-П+/50х90, ПеН-2Г-П+/50х100, ПеН-2Г-П+/60х60, ПеН-2Г-П+/60х70, ПеН-2Г-П+/60х80, ПеН-2Г-П+/60х90, ПеН-2Г-П+/60х100, ПеН-2Г-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	П+/70х70, ПеН-2Г-П+/70х80, ПеН-2Г-П+/70х90, ПеН-2Г-П+/80х80, ПеН-2Г-П+/80х90. 85. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-2Ж-Э/30х50, ПеН-2Ж-Э/30х60, ПеН-2Ж-Э/30х70, ПеН-2Ж-Э/30х80, ПеН-2Ж-Э/30х90, ПеН-2Ж-Э/30х100, ПеН-2Ж-Э/40х40, ПеН-2Ж-Э/40х50, ПеН-2Ж-Э/40х60, ПеН-2Ж-Э/40х70, ПеН-2Ж-Э/40х80, ПеН-2Ж-Э/40х90, ПеН-2Ж-Э/40х100, ПеН-2Ж-Э/50х50, ПеН-2Ж-Э/50х60, ПеН-2Ж-Э/50х70, ПеН-2Ж-Э/50х80, ПеН-2Ж-Э/50х90, ПеН-2Ж-Э/50х100, ПеН-2Ж-Э/60х60, ПеН-2Ж-Э/60х70, ПеН-2Ж-Э/60х80, ПеН-2Ж-Э/60х90, ПеН-2Ж-Э/60х100, ПеН-2Ж-Э/70х70, ПеН-2Ж-Э/70х80, ПеН-2Ж-Э/70х90, ПеН-2Ж-Э/80х80, ПеН-2Ж-Э/80х90. 86. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-2Ж-С/30х50, ПеН-2Ж-С/30х60, ПеН-2Ж-С/30х70, ПеН-2Ж-С/30х80, ПеН-2Ж-С/30х90, ПеН-2Ж-С/30х100, ПеН-2Ж-С/40х40, ПеН-2Ж-С/40х50, ПеН-2Ж-С/40х60, ПеН-2Ж-С/40х70, ПеН-2Ж-С/40х80, ПеН-2Ж-С/40х90, ПеН-2Ж-С/40х100, ПеН-2Ж-С/50х50, ПеН-2Ж-С/50х60, ПеН-2Ж-С/50х70, ПеН-2Ж-С/50х80, ПеН-2Ж-С/50х90, ПеН-2Ж-С/50х100, ПеН-2Ж-С/60х60, ПеН-2Ж-С/60х70, ПеН-2Ж-С/60х80, ПеН-2Ж-С/60х90, ПеН-2Ж-С/60х100, ПеН-2Ж-С/70х70, ПеН-2Ж-С/70х80, ПеН-2Ж-С/70х90, ПеН-2Ж-С/80х80, ПеН-2Ж-С/80х90. 87. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-2Ж-К/30х50, ПеН-2Ж-К/30х60, ПеН-2Ж-К/30х70, ПеН-2Ж-К/30х80, ПеН-2Ж-К/30х90, ПеН-2Ж-К/30х100, ПеН-2Ж-К/40х40, ПеН-2Ж-К/40х50, ПеН-2Ж-К/40х60, ПеН-2Ж-К/40х70, ПеН-2Ж-К/40х80, ПеН-2Ж-К/40х90, ПеН-2Ж-К/40х100, ПеН-2Ж-К/50х50, ПеН-2Ж-К/50х60, ПеН-2Ж-К/50х70, ПеН-2Ж-К/50х80, ПеН-2Ж-К/50х90, ПеН-2Ж-К/50х100, ПеН-2Ж-К/60х60, ПеН-2Ж-К/60х70, ПеН-2Ж-К/60х80, ПеН-2Ж-К/60х90, ПеН-2Ж-К/60х100, ПеН-2Ж-К/70х70, ПеН-2Ж-К/70х80, ПеН-2Ж-К/70х90, ПеН-2Ж-К/80х80, ПеН-2Ж-К/80х90. 88. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, желтого цвета, с поверхностной плотностью		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-2Ж-К+/30х50, ПеН-2Ж-К+/30х60, ПеН-2Ж-К+/30х70, ПеН-2Ж-К+/30х80, ПеН-2Ж-К+/30х90, ПеН-2Ж-К+/30х100, ПеН-2Ж-К+/40х40, ПеН-2Ж-К+/40х50, ПеН-2Ж-К+/40х60, ПеН-2Ж-К+/40х70, ПеН-2Ж-К+/40х80, ПеН-2Ж-К+/40х90, ПеН-2Ж-К+/40х100, ПеН-2Ж-К+/50х50, ПеН-2Ж-К+/50х60, ПеН-2Ж-К+/50х70, ПеН-2Ж-К+/50х80, ПеН-2Ж-К+/50х90, ПеН-2Ж-К+/50х100, ПеН-2Ж-К+/60х60, ПеН-2Ж-К+/60х70, ПеН-2Ж-К+/60х80, ПеН-2Ж-К+/60х90, ПеН-2Ж-К+/60х100, ПеН-2Ж-К+/70х70, ПеН-2Ж-К+/70х80, ПеН-2Ж-К+/70х90, ПеН-2Ж-К+/80х80, ПеН-2Ж-К+/80х90. 89. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-2Ж-П/30х50, ПеН-2Ж-П/30х60, ПеН-2Ж-П/30х70, ПеН-2Ж-П/30х80, ПеН-2Ж-П/30х90, ПеН-2Ж-П/30х100, ПеН-2Ж-П/40х40, ПеН-2Ж-П/40х50, ПеН-2Ж-П/40х60, ПеН-2Ж-П/40х70, ПеН-2Ж-П/40х80, ПеН-2Ж-П/40х90, ПеН-2Ж-П/40х100, ПеН-2Ж-П/50х50, ПеН-2Ж-П/50х60, ПеН-2Ж-П/50х70, ПеН-2Ж-П/50х80, ПеН-2Ж-П/50х90, ПеН-2Ж-П/50х100, ПеН-2Ж-П/60х60, ПеН-2Ж-П/60х70, ПеН-2Ж-П/60х80, ПеН-2Ж-П/60х90, ПеН-2Ж-П/60х100, ПеН-2Ж-П/70х70, ПеН-2Ж-П/70х80, ПеН-2Ж-П/70х90, ПеН-2Ж-П/80х80, ПеН-2Ж-П/80х90. 90. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, желтого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-2Ж-П+/30х50, ПеН-2Ж-П+/30х60, ПеН-2Ж-П+/30х70, ПеН-2Ж-П+/30х80, ПеН-2Ж-П+/30х90, ПеН-2Ж-П+/30х100, ПеН-2Ж-П+/40х40, ПеН-2Ж-П+/40х50, ПеН-2Ж-П+/40х60, ПеН-2Ж-П+/40х70, ПеН-2Ж-П+/40х80, ПеН-2Ж-П+/40х90, ПеН-2Ж-П+/40х100, ПеН-2Ж-П+/50х50, ПеН-2Ж-П+/50х60, ПеН-2Ж-П+/50х70, ПеН-2Ж-П+/50х80, ПеН-2Ж-П+/50х90, ПеН-2Ж-П+/50х100, ПеН-2Ж-П+/60х60, ПеН-2Ж-П+/60х70, ПеН-2Ж-П+/60х80, ПеН-2Ж-П+/60х90, ПеН-2Ж-П+/60х100, ПеН-2Ж-П+/70х70, ПеН-2Ж-П+/70х80, ПеН-2Ж-П+/70х90, ПеН-2Ж-П+/80х80, ПеН-2Ж-П+/80х90. 91. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, розового цвета, с поверхностной плотностью		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-2Р-Э/30х50, ПеН-2Р-Э/30х60, ПеН-2Р-Э/30х70, ПеН-2Р-Э/30х80, ПеН-2Р-Э/30х90, ПеН-2Р-Э/30х100, ПеН-2Р-Э/40х40, ПеН-2Р-Э/40х50, ПеН-2Р-Э/40х60, ПеН-2Р-Э/40х70, ПеН-2Р-Э/40х80, ПеН-2Р-Э/40х90, ПеН-2Р-Э/40х100, ПеН-2Р-Э/50х50, ПеН-2Р-Э/50х60, ПеН-2Р-Э/50х70, ПеН-2Р-Э/50х80, ПеН-2Р-Э/50х90, ПеН-2Р-Э/50х100, ПеН-2Р-Э/60х60, ПеН-2Р-Э/60х70, ПеН-2Р-Э/60х80, ПеН-2Р-Э/60х90, ПеН-2Р-Э/60х100, ПеН-2Р-Э/70х70, ПеН-2Р-Э/70х80, ПеН-2Р-Э/70х90, ПеН-2Р-Э/80х80, ПеН-2Р-Э/80х90. 92. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-2Р-С/30х50, ПеН-2Р-С/30х60, ПеН-2Р-С/30х70, ПеН-2Р-С/30х80, ПеН-2Р-С/30х90, ПеН-2Р-С/30х100, ПеН-2Р-С/40х40, ПеН-2Р-С/40х50, ПеН-2Р-С/40х60, ПеН-2Р-С/40х70, ПеН-2Р-С/40х80, ПеН-2Р-С/40х90, ПеН-2Р-С/40х100, ПеН-2Р-С/50х50, ПеН-2Р-С/50х60, ПеН-2Р-С/50х70, ПеН-2Р-С/50х80, ПеН-2Р-С/50х90, ПеН-2Р-С/50х100, ПеН-2Р-С/60х60, ПеН-2Р-С/60х70, ПеН-2Р-С/60х80, ПеН-2Р-С/60х90, ПеН-2Р-С/60х100, ПеН-2Р-С/70х70, ПеН-2Р-С/70х80, ПеН-2Р-С/70х90, ПеН-2Р-С/80х80, ПеН-2Р-С/80х90. 93. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-2Р-К/30х50, ПеН-2Р-К/30х60, ПеН-2Р-К/30х70, ПеН-2Р-К/30х80, ПеН-2Р-К/30х90, ПеН-2Р-К/30х100, ПеН-2Р-К/40х40, ПеН-2Р-К/40х50, ПеН-2Р-К/40х60, ПеН-2Р-К/40х70, ПеН-2Р-К/40х80, ПеН-2Р-К/40х90, ПеН-2Р-К/40х100, ПеН-2Р-К/50х50, ПеН-2Р-К/50х60, ПеН-2Р-К/50х70, ПеН-2Р-К/50х80, ПеН-2Р-К/50х90, ПеН-2Р-К/50х100, ПеН-2Р-К/60х60, ПеН-2Р-К/60х70, ПеН-2Р-К/60х80, ПеН-2Р-К/60х90, ПеН-2Р-К/60х100, ПеН-2Р-К/70х70, ПеН-2Р-К/70х80, ПеН-2Р-К/70х90, ПеН-2Р-К/80х80, ПеН-2Р-К/80х90. 94. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-2Р-К+/30х50, ПеН-2Р-К+/30х60, ПеН-2Р-К+/30х70, ПеН-2Р-К+/30х80, ПеН-2Р-К+/30х90, ПеН-2Р-К+/30х100, ПеН-2Р-К+/40х40, ПеН-2Р-К+/40х50, ПеН-2Р-К+/40х60, ПеН-2Р-К+/40х70,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ПеН-2Р-К+/40х80, ПеН-2Р-К+/40х90, ПеН-2Р-К+/40х100, ПеН-2Р-К+/50х50, ПеН-2Р-К+/50х60, ПеН-2Р-К+/50х70, ПеН-2Р-К+/50х80, ПеН-2Р-К+/50х90, ПеН-2Р-К+/50х100, ПеН-2Р-К+/60х60, ПеН-2Р-К+/60х70, ПеН-2Р-К+/60х80, ПеН-2Р-К+/60х90, ПеН-2Р-К+/60х100, ПеН-2Р-К+/70х70, ПеН-2Р-К+/70х80, ПеН-2Р-К+/70х90, ПеН-2Р-К+/80х80, ПеН-2Р-К+/80х90. 95. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-2Р-П/30х50, ПеН-2Р-П/30х60, ПеН-2Р-П/30х70, ПеН-2Р-П/30х80, ПеН-2Р-П/30х90, ПеН-2Р-П/30х100, ПеН-2Р-П/40х40, ПеН-2Р-П/40х50, ПеН-2Р-П/40х60, ПеН-2Р-П/40х70, ПеН-2Р-П/40х80, ПеН-2Р-П/40х90, ПеН-2Р-П/40х100, ПеН-2Р-П/50х50, ПеН-2Р-П/50х60, ПеН-2Р-П/50х70, ПеН-2Р-П/50х80, ПеН-2Р-П/50х90, ПеН-2Р-П/50х100, ПеН-2Р-П/60х60, ПеН-2Р-П/60х70, ПеН-2Р-П/60х80, ПеН-2Р-П/60х90, ПеН-2Р-П/60х100, ПеН-2Р-П/70х70, ПеН-2Р-П/70х80, ПеН-2Р-П/70х90, ПеН-2Р-П/80х80, ПеН-2Р-П/80х90. 96. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, розового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-2Р-П+/30х50, ПеН-2Р-П+/30х60, ПеН-2Р-П+/30х70, ПеН-2Р-П+/30х80, ПеН-2Р-П+/30х90, ПеН-2Р-П+/30х100, ПеН-2Р-П+/40х40, ПеН-2Р-П+/40х50, ПеН-2Р-П+/40х60, ПеН-2Р-П+/40х70, ПеН-2Р-П+/40х80, ПеН-2Р-П+/40х90, ПеН-2Р-П+/40х100, ПеН-2Р-П+/50х50, ПеН-2Р-П+/50х60, ПеН-2Р-П+/50х70, ПеН-2Р-П+/50х80, ПеН-2Р-П+/50х90, ПеН-2Р-П+/50х100, ПеН-2Р-П+/60х60, ПеН-2Р-П+/60х70, ПеН-2Р-П+/60х80, ПеН-2Р-П+/60х90, ПеН-2Р-П+/60х100, ПеН-2Р-П+/70х70, ПеН-2Р-П+/70х80, ПеН-2Р-П+/70х90, ПеН-2Р-П+/80х80, ПеН-2Р-П+/80х90. 97. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-23-Э/30х50, ПеН-23-Э/30х60, ПеН-23-Э/30х70, ПеН-23-Э/30х80, ПеН-23-Э/30х90, ПеН-23-Э/30х100, ПеН-23-Э/40х40, ПеН-23-Э/40х50, ПеН-23-Э/40х60, ПеН-23-Э/40х70, ПеН-23-Э/40х80, ПеН-23-Э/40х90, ПеН-23-Э/40х100, ПеН-23-Э/50х50, ПеН-23-Э/50х60, ПеН-23-Э/50х70, ПеН-23-Э/50х80, ПеН-23-Э/50х90, ПеН-23-Э/50х100, ПеН-23-Э/60х60, ПеН-23-Э/60х70, ПеН-23-Э/60х80, ПеН-23-Э/60х90,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ПеН-23-Э/60х100, ПеН-23-Э/70х70, ПеН-23-Э/70х80, ПеН-23-Э/70х90, ПеН-23-Э/80х80, ПеН-23-Э/80х90. 98. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-23-С/30х50, ПеН-23-С/30х60, ПеН-23-С/30х70, ПеН-23-С/30х80, ПеН-23-С/30х90, ПеН-23-С/30х100, ПеН-23-С/40х40, ПеН-23-С/40х50, ПеН-23-С/40х60, ПеН-23-С/40х70, ПеН-23-С/40х80, ПеН-23-С/40х90, ПеН-23-С/40х100, ПеН-23-С/50х50, ПеН-23-С/50х60, ПеН-23-С/50х70, ПеН-23-С/50х80, ПеН-23-С/50х90, ПеН-23-С/50х100, ПеН-23-С/60х60, ПеН-23-С/60х70, ПеН-23-С/60х80, ПеН-23-С/60х90, ПеН-23-С/60х100, ПеН-23-С/70х70, ПеН-23-С/70х80, ПеН-23-С/70х90, ПеН-23-С/80х80, ПеН-23-С/80х90. 99. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-23-К/30х50, ПеН-23-К/30х60, ПеН-23-К/30х70, ПеН-23-К/30х80, ПеН-23-К/30х90, ПеН-23-К/30х100, ПеН-23-К/40х40, ПеН-23-К/40х50, ПеН-23-К/40х60, ПеН-23-К/40х70, ПеН-23-К/40х80, ПеН-23-К/40х90, ПеН-23-К/40х100, ПеН-23-К/50х50, ПеН-23-К/50х60, ПеН-23-К/50х70, ПеН-23-К/50х80, ПеН-23-К/50х90, ПеН-23-К/50х100, ПеН-23-К/60х60, ПеН-23-К/60х70, ПеН-23-К/60х80, ПеН-23-К/60х90, ПеН-23-К/60х100, ПеН-23-К/70х70, ПеН-23-К/70х80, ПеН-23-К/70х90, ПеН-23-К/80х80, ПеН-23-К/80х90. 100. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-23-К+/30х50, ПеН-23-К+/30х60, ПеН-23-К+/30х70, ПеН-23-К+/30х80, ПеН-23-К+/30х90, ПеН-23-К+/30х100, ПеН-23-К+/40х40, ПеН-23-К+/40х50, ПеН-23-К+/40х60, ПеН-23-К+/40х70, ПеН-23-К+/40х80, ПеН-23-К+/40х90, ПеН-23-К+/40х100, ПеН-23-К+/50х50, ПеН-23-К+/50х60, ПеН-23-К+/50х70, ПеН-23-К+/50х80, ПеН-23-К+/50х90, ПеН-23-К+/50х100, ПеН-23-К+/60х60, ПеН-23-К+/60х70, ПеН-23-К+/60х80, ПеН-23-К+/60х90, ПеН-23-К+/60х100, ПеН-23-К+/70х70, ПеН-23-К+/70х80, ПеН-23-К+/70х90, ПеН-23-К+/80х80, ПеН-23-К+/80х90. 101. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премнум" и размером (в см), арт.: ПеН-23-П/30х50, ПеН-23-П/30х60, ПеН-23-П/30х70, ПеН-23-П/30х80, ПеН-23-П/30х90, ПеН-23-П/30х100, ПеН-23-П/40х40, ПеН-23-П/40х50, ПеН-23-П/40х60, ПеН-23-П/40х70, ПеН-23-П/40х80, ПеН-23-П/40х90, ПеН-23-П/40х100, ПеН-23-П/50х50, ПеН-23-П/50х60, ПеН-23-П/50х70, ПеН-23-П/50х80, ПеН-23-П/50х90, ПеН-23-П/50х100, ПеН-23-П/60х60, ПеН-23-П/60х70, ПеН-23-П/60х80, ПеН-23-П/60х90, ПеН-23-П/60х100, ПеН-23-П/70х70, ПеН-23-П/70х80, ПеН-23-П/70х90, ПеН-23-П/80х80, ПеН-23-П/80х90. 102. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, зеленого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премнум+" и размером (в см), арт.: ПеН-23-П+/30х50, ПеН-23-П+/30х60, ПеН-23-П+/30х70, ПеН-23-П+/30х80, ПеН-23-П+/30х90, ПеН-23-П+/30х100, ПеН-23-П+/40х40, ПеН-23-П+/40х50, ПеН-23-П+/40х60, ПеН-23-П+/40х70, ПеН-23-П+/40х80, ПеН-23-П+/40х90, ПеН-23-П+/40х100, ПеН-23-П+/50х50, ПеН-23-П+/50х60, ПеН-23-П+/50х70, ПеН-23-П+/50х80, ПеН-23-П+/50х90, ПеН-23-П+/50х100, ПеН-23-П+/60х60, ПеН-23-П+/60х70, ПеН-23-П+/60х80, ПеН-23-П+/60х90, ПеН-23-П+/60х100, ПеН-23-П+/70х70, ПеН-23-П+/70х80, ПеН-23-П+/70х90, ПеН-23-П+/80х80, ПеН-23-П+/80х90. 103. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-2Ф-Э/30х50, ПеН-2Ф-Э/30х60, ПеН-2Ф-Э/30х70, ПеН-2Ф-Э/30х80, ПеН-2Ф-Э/30х90, ПеН-2Ф-Э/30х100, ПеН-2Ф-Э/40х40, ПеН-2Ф-Э/40х50, ПеН-2Ф-Э/40х60, ПеН-2Ф-Э/40х70, ПеН-2Ф-Э/40х80, ПеН-2Ф-Э/40х90, ПеН-2Ф-Э/40х100, ПеН-2Ф-Э/50х50, ПеН-2Ф-Э/50х60, ПеН-2Ф-Э/50х70, ПеН-2Ф-Э/50х80, ПеН-2Ф-Э/50х90, ПеН-2Ф-Э/50х100, ПеН-2Ф-Э/60х60, ПеН-2Ф-Э/60х70, ПеН-2Ф-Э/60х80, ПеН-2Ф-Э/60х90, ПеН-2Ф-Э/60х100, ПеН-2Ф-Э/70х70, ПеН-2Ф-Э/70х80, ПеН-2Ф-Э/70х90, ПеН-2Ф-Э/80х80, ПеН-2Ф-Э/80х90. 104. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-2Ф-С/30х50, ПеН-2Ф-С/30х60, ПеН-2Ф-С/30х70, ПеН-2Ф-С/30х80, ПеН-2Ф-С/30х90, ПеН-2Ф-С/30х100, ПеН-2Ф-С/40х40, ПеН-2Ф-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	С/40х50, ПеН-2Ф-С/40х60, ПеН-2Ф-С/40х70, ПеН-2Ф-С/40х80, ПеН-2Ф-С/40х90, ПеН-2Ф-С/40х100, ПеН-2Ф-С/50х50, ПеН-2Ф-С/50х60, ПеН-2Ф-С/50х70, ПеН-2Ф-С/50х80, ПеН-2Ф-С/50х90, ПеН-2Ф-С/50х100, ПеН-2Ф-С/60х60, ПеН-2Ф-С/60х70, ПеН-2Ф-С/60х80, ПеН-2Ф-С/60х90, ПеН-2Ф-С/60х100, ПеН-2Ф-С/70х70, ПеН-2Ф-С/70х80, ПеН-2Ф-С/70х90, ПеН-2Ф-С/80х80, ПеН-2Ф-С/80х90. 105. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-2Ф-К/30х50, ПеН-2Ф-К/30х60, ПеН-2Ф-К/30х70, ПеН-2Ф-К/30х80, ПеН-2Ф-К/30х90, ПеН-2Ф-К/30х100, ПеН-2Ф-К/40х40, ПеН-2Ф-К/40х50, ПеН-2Ф-К/40х60, ПеН-2Ф-К/40х70, ПеН-2Ф-К/40х80, ПеН-2Ф-К/40х90, ПеН-2Ф-К/40х100, ПеН-2Ф-К/50х50, ПеН-2Ф-К/50х60, ПеН-2Ф-К/50х70, ПеН-2Ф-К/50х80, ПеН-2Ф-К/50х90, ПеН-2Ф-К/50х100, ПеН-2Ф-К/60х60, ПеН-2Ф-К/60х70, ПеН-2Ф-К/60х80, ПеН-2Ф-К/60х90, ПеН-2Ф-К/60х100, ПеН-2Ф-К/70х70, ПеН-2Ф-К/70х80, ПеН-2Ф-К/70х90, ПеН-2Ф-К/80х80, ПеН-2Ф-К/80х90. 106. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-2Ф-К+/30х50, ПеН-2Ф-К+/30х60, ПеН-2Ф-К+/30х70, ПеН-2Ф-К+/30х80, ПеН-2Ф-К+/30х90, ПеН-2Ф-К+/30х100, ПеН-2Ф-К+/40х40, ПеН-2Ф-К+/40х50, ПеН-2Ф-К+/40х60, ПеН-2Ф-К+/40х70, ПеН-2Ф-К+/40х80, ПеН-2Ф-К+/40х90, ПеН-2Ф-К+/40х100, ПеН-2Ф-К+/50х50, ПеН-2Ф-К+/50х60, ПеН-2Ф-К+/50х70, ПеН-2Ф-К+/50х80, ПеН-2Ф-К+/50х90, ПеН-2Ф-К+/50х100, ПеН-2Ф-К+/60х60, ПеН-2Ф-К+/60х70, ПеН-2Ф-К+/60х80, ПеН-2Ф-К+/60х90, ПеН-2Ф-К+/60х100, ПеН-2Ф-К+/70х70, ПеН-2Ф-К+/70х80, ПеН-2Ф-К+/70х90, ПеН-2Ф-К+/80х80, ПеН-2Ф-К+/80х90. 107. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-2Ф-П/30х50, ПеН-2Ф-П/30х60, ПеН-2Ф-П/30х70, ПеН-2Ф-П/30х80, ПеН-2Ф-П/30х90, ПеН-2Ф-П/30х100, ПеН-2Ф-П/40х40, ПеН-2Ф-П/40х50, ПеН-2Ф-П/40х60, ПеН-2Ф-П/40х70, ПеН-2Ф-П/40х80, ПеН-2Ф-П/40х90, ПеН-2Ф-П/40х100, ПеН-2Ф-		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	П/50х50, ПеН-2Ф-П/50х60, ПеН-2Ф-П/50х70, ПеН-2Ф-П/50х80, ПеН-2Ф-П/50х90, ПеН-2Ф-П/50х100, ПеН-2Ф-П/60х60, ПеН-2Ф-П/60х70, ПеН-2Ф-П/60х80, ПеН-2Ф-П/60х90, ПеН-2Ф-П/60х100, ПеН-2Ф-П/70х70, ПеН-2Ф-П/70х80, ПеН-2Ф-П/70х90, ПеН-2Ф-П/80х80, ПеН-2Ф-П/80х90. 108. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа В, фиолетового цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-2Ф-П+/30х50, ПеН-2Ф-П+/30х60, ПеН-2Ф-П+/30х70, ПеН-2Ф-П+/30х80, ПеН-2Ф-П+/30х90, ПеН-2Ф-П+/30х100, ПеН-2Ф-П+/40х40, ПеН-2Ф-П+/40х50, ПеН-2Ф-П+/40х60, ПеН-2Ф-П+/40х70, ПеН-2Ф-П+/40х80, ПеН-2Ф-П+/40х90, ПеН-2Ф-П+/40х100, ПеН-2Ф-П+/50х50, ПеН-2Ф-П+/50х60, ПеН-2Ф-П+/50х70, ПеН-2Ф-П+/50х80, ПеН-2Ф-П+/50х90, ПеН-2Ф-П+/50х100, ПеН-2Ф-П+/60х60, ПеН-2Ф-П+/60х70, ПеН-2Ф-П+/60х80, ПеН-2Ф-П+/60х90, ПеН-2Ф-П+/60х100, ПеН-2Ф-П+/70х70, ПеН-2Ф-П+/70х80, ПеН-2Ф-П+/70х90, ПеН-2Ф-П+/80х80, ПеН-2Ф-П+/80х90. 109. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа спанлейс, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Эконом" и размером (в см), арт.: ПеН-3Б-Э/30х50, ПеН-3Б-Э/30х60, ПеН-3Б-Э/30х70, ПеН-3Б-Э/30х80, ПеН-3Б-Э/30х90, ПеН-3Б-Э/30х100, ПеН-3Б-Э/40х40, ПеН-3Б-Э/40х50, ПеН-3Б-Э/40х60, ПеН-3Б-Э/40х70, ПеН-3Б-Э/40х80, ПеН-3Б-Э/40х90, ПеН-3Б-Э/40х100, ПеН-3Б-Э/50х50, ПеН-3Б-Э/50х60, ПеН-3Б-Э/50х70, ПеН-3Б-Э/50х80, ПеН-3Б-Э/50х90, ПеН-3Б-Э/50х100, ПеН-3Б-Э/60х60, ПеН-3Б-Э/60х70, ПеН-3Б-Э/60х80, ПеН-3Б-Э/60х90, ПеН-3Б-Э/60х100, ПеН-3Б-Э/70х70, ПеН-3Б-Э/70х80, ПеН-3Б-Э/70х90, ПеН-3Б-Э/80х80, ПеН-3Б-Э/80х90. 110. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа спанлейс, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Стандарт" и размером (в см), арт.: ПеН-3Б-С/30х50, ПеН-3Б-С/30х60, ПеН-3Б-С/30х70, ПеН-3Б-С/30х80, ПеН-3Б-С/30х90, ПеН-3Б-С/30х100, ПеН-3Б-С/40х40, ПеН-3Б-С/40х50, ПеН-3Б-С/40х60, ПеН-3Б-С/40х70, ПеН-3Б-С/40х80, ПеН-3Б-С/40х90, ПеН-3Б-С/40х100, ПеН-3Б-С/50х50, ПеН-3Б-С/50х60, ПеН-3Б-С/50х70, ПеН-3Б-С/50х80, ПеН-3Б-С/50х90, ПеН-3Б-С/50х100, ПеН-3Б-С/60х60,		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	ПеН-3Б-С/60х70, ПеН-3Б-С/60х80, ПеН-3Б-С/60х90, ПеН-3Б-С/60х100, ПеН-3Б-С/70х70, ПеН-3Б-С/70х80, ПеН-3Б-С/70х90, ПеН-3Б-С/80х80, ПеН-3Б-С/80х90. 111. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа спанлейс, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт" и размером (в см), арт.: ПеН-3Б-К/30х50, ПеН-3Б-К/30х60, ПеН-3Б-К/30х70, ПеН-3Б-К/30х80, ПеН-3Б-К/30х90, ПеН-3Б-К/30х100, ПеН-3Б-К/40х40, ПеН-3Б-К/40х50, ПеН-3Б-К/40х60, ПеН-3Б-К/40х70, ПеН-3Б-К/40х80, ПеН-3Б-К/40х90, ПеН-3Б-К/40х100, ПеН-3Б-К/50х50, ПеН-3Б-К/50х60, ПеН-3Б-К/50х70, ПеН-3Б-К/50х80, ПеН-3Б-К/50х90, ПеН-3Б-К/50х100, ПеН-3Б-К/60х60, ПеН-3Б-К/60х70, ПеН-3Б-К/60х80, ПеН-3Б-К/60х90, ПеН-3Б-К/60х100, ПеН-3Б-К/70х70, ПеН-3Б-К/70х80, ПеН-3Б-К/70х90, ПеН-3Б-К/80х80, ПеН-3Б-К/80х90. 112. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа спанлейс, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Комфорт+" и размером (в см), в арт.: ПеН-3Б-К+/30х50, ПеН-3Б-К+/30х60, ПеН-3Б-К+/30х70, ПеН-3Б-К+/30х80, ПеН-3Б-К+/30х90, ПеН-3Б-К+/30х100, ПеН-3Б-К+/40х40, ПеН-3Б-К+/40х50, ПеН-3Б-К+/40х60, ПеН-3Б-К+/40х70, ПеН-3Б-К+/40х80, ПеН-3Б-К+/40х90, ПеН-3Б-К+/40х100, ПеН-3Б-К+/50х50, ПеН-3Б-К+/50х60, ПеН-3Б-К+/50х70, ПеН-3Б-К+/50х80, ПеН-3Б-К+/50х90, ПеН-3Б-К+/50х100, ПеН-3Б-К+/60х60, ПеН-3Б-К+/60х70, ПеН-3Б-К+/60х80, ПеН-3Б-К+/60х90, ПеН-3Б-К+/60х100, ПеН-3Б-К+/70х70, ПеН-3Б-К+/70х80, ПеН-3Б-К+/70х90, ПеН-3Б-К+/80х80, ПеН-3Б-К+/80х90. 113. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа спанлейс, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум" и размером (в см), арт.: ПеН-3Б-П/30х50, ПеН-3Б-П/30х60, ПеН-3Б-П/30х70, ПеН-3Б-П/30х80, ПеН-3Б-П/30х90, ПеН-3Б-П/30х100, ПеН-3Б-П/40х40, ПеН-3Б-П/40х50, ПеН-3Б-П/40х60, ПеН-3Б-П/40х70, ПеН-3Б-П/40х80, ПеН-3Б-П/40х90, ПеН-3Б-П/40х100, ПеН-3Б-П/50х50, ПеН-3Б-П/50х60, ПеН-3Б-П/50х70, ПеН-3Б-П/50х80, ПеН-3Б-П/50х90, ПеН-3Б-П/50х100, ПеН-3Б-П/60х60, ПеН-3Б-П/60х70, ПеН-3Б-П/60х80, ПеН-3Б-П/60х90, ПеН-3Б-П/60х100, ПеН-3Б-П/70х70, ПеН-3Б-П/70х80, ПеН-3Б-П/70х90, ПеН-3Б-П/80х80, ПеН-3Б-П/80х90.		

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	114. Пеленка медицинская одноразовая нестерильная из нетканого материала типа спанлейс, белого цвета, с поверхностной плотностью типа "Премиум+" и размером (в см), арт.: ПеН-ЗБ-П+/30х50, ПеН-ЗБ-П+/30х60, ПеН-ЗБ-П+/30х70, ПеН-ЗБ-П+/30х80, ПеН-ЗБ-П+/30х90, ПеН-ЗБ-П+/30х100, ПеН-ЗБ-П+/40х40, ПеН-ЗБ-П+/40х50, ПеН-ЗБ-П+/40х60, ПеН-ЗБ-П+/40х70, ПеН-ЗБ-П+/40х80, ПеН-ЗБ-П+/40х90, ПеН-ЗБ-П+/40х100, ПеН-ЗБ-П+/50х50, ПеН-ЗБ-П+/50х60, ПеН-ЗБ-П+/50х70, ПеН-ЗБ-П+/50х80, ПеН-ЗБ-П+/50х90, ПеН-ЗБ-П+/50х100, ПеН-ЗБ-П+/60х60, ПеН-ЗБ-П+/60х70, ПеН-ЗБ-П+/60х80, ПеН-ЗБ-П+/60х90, ПеН-ЗБ-П+/60х100, ПеН-ЗБ-П+/70х70, ПеН-ЗБ-П+/70х80, ПеН-ЗБ-П+/70х90, ПеН-ЗБ-П+/80х80, ПеН-ЗБ-П+/80х90.		
44.	Стекло предметное	МИ.942281.001 СП	не более 10 шт. (при необходимости)
45.	Стекло предметное СП-7102 с необработанными краями	МИ.942281.001 СПН	не более 10 шт. (при необходимости)
46.	Транспортный контейнер для микропрепаратов	МИ.942281.001 ТК	не более 10 шт. (при необходимости)
47.	Пенал для предметных стекол	МИ.942281.001 ПЕН	не более 10 шт. (при необходимости)
48.	Бахилы медицинские артикул ГСТ23Г или ГСТ28Г или ГОПТ30Г или ГОПТ35Г или ГОПТ40Г или ГПР45Г или ГПР50Г или ГОПР60Г или ГОПР80Г	МИ.942281.001 Б1	не более 2 пар (при необходимости)
49.	Бахилы в вариантах исполнения: - низкие из нетканого материала длиной 38,0 см и высотой 15,0 см, или 18,0 см или 20,0 см или - высокие из нетканого материала длиной 38,0 см и высотой 40,0 см или 50,0 см или - низкие полиэтиленовые длиной 38,0 см и высотой 15,0 см или 18,0 см или 20,0 см или - низкие 2-х слойные длиной 38,0 см и высотой 15,0 см или 18,0 см или 20,0 см	МИ.942281.001 Б2	не более 2 пар (при необходимости)
50.	Бахилы в вариантах исполнения: низкие или высокие	МИ.942281.001 Б3	не более 2 пар

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	Бахилы низкие, размер 37-39, спанбонд плотность 25 г/м2 голубой. Высота 18 см, длина следа 38 см. Бахилы низкие, размер 39-41, спанбонд плотность 25 г/м2 голубой. Высота 18 см, длина следа 40 см. Бахилы низкие, размер 39-41, спанбонд плотность 42 г/м2 голубой. Высота 18 см, длина следа 40 см. Бахилы высокие, размер 39-41, спанбонд плотность 25 г/м2 голубой. Высота 56 см, длина следа 40 см. Бахилы высокие, размер 39-41, спанбонд плотность 42 г/м2 голубой. Высота 56 см, длина следа 40 см.		(при необходим ости)
51.	Бахилы в вариантах исполнения: хирургические (высокие или низкие) или бахилы на ступню (носки) Бахилы хирургические, высокие, не менее 36 см, на завязках, плотность не менее 20гр./м2. Бахилы хирургические, низкие, не менее 15 см, на резинках, плотность не менее 20гр./м2. Бахилы хирургические, низкие, на ступню, плотность не менее 20гр./м2	МИ.942281.001 Б4	не более 2 пар (при необходим ости)
52.	Шапочка «Берет» -диаметр при растянутой резинке 53 см., плотность- 18 г/м2; -диаметр при растянутой резинке 53 см., плотность- 15 г/м2.	МИ.942281.001 Ш1	1 шт. (при необходим ости)
53.	Шапочка (берет)	МИ.942281.001 Ш2	1 шт. (при необходим ости)
54.	Шапочка «Шарлотта» в вариантах исполнения: - плотность 17 г/м², с двойной резинкой или - плотность 20 г/м², с двойной резинкой или - плотность 25 г/м², с двойной резинкой размерами 19" или 21"или 23"	МИ.942281.001 ШШ	1 шт. (при необходим ости)
55.	Маска медицинская из нетканого материала одноразовая	МИ.942281.001 М1	1 шт. (при необходим ости)
56.	Маски медицинские трехслойные одноразовые в вариантах исполнения МБ175Б или МС175Б или МС175С	МИ.942281.001 М2	1 шт. (при необходим ости)
57.	Маска хирургическая в вариантах исполнения: на завязках или на резинках	МИ.942281.001 М3	1 шт. (при необходим ости)
58.	Контейнеры для биопроб полимерные в вариантах исполнения: -Контейнер для биопроб 30 мл полимерный или	МИ.942281.001 КБ	1 шт.

№ н/п	Наименование	Обозначение документа	Количество
	-Контейнер для биопроб 30 мл со шпателем полимерный или -Контейнер для биопроб 60 мл полимерный или -Контейнер для биопроб 60 мл со шпателем полимерный или -Контейнер для биопроб 100 мл полимерный или -Контейнер для биопроб 100 мл со шпателем полимерный или -Контейнер для биопроб 120 мл полимерный или -Контейнер для биопроб 120 мл со шпателем полимерный		(при необходимости)
59.	Контейнер одноразовый медицинский полимерный с ложкой и без ложки объемом 20мм, 25мм, 30 мл, 40 мл, 50 мл, 60 мл, 100 мл, 125 мл, 200 мл	МИ.942281.001 КО	1 шт. (при необходимости)
60.	Вкладыш-направление	МИ.942281.001 ВН	1 шт. (при необходимости)
Эксплуатационная документация			
61.	Инструкция по применению	МИ.942281.001 ИП	6 экз. на транспортную тару /или 1 экз. на групповую

Описание медицинского изделия

Детализированное назначение изделий, входящих в состав набора:

Зеркала гинекологические полимерные стерильные по Куско применяются для расширения влагалища и обнажения шейки матки при проведении профилактических осмотров, различных лечебно-диагностических процедур.

Зонды применяются для проведения диагностических или лечебных процедур, для отбора биологического материала для клинических бактериологических, гистологических и/или цитологических исследований.

Перчатки применяются для защиты рук медицинского персонала при проведении профилактических осмотров и различных лечебно-диагностических манипуляций, осмотре пациентов и проведении лабораторных исследований.

Салфетка, пеленка применяются для защиты пациента при проведении профилактических осмотров и различных лечебно-диагностических манипуляций.

Бахилы применяются для использования в качестве чехлов, закрывающих обувь, для поддержания необходимых санитарно-гигиенических норм в медицинских и лабораторных помещениях.

Шапочка применяется для защиты медицинского персонала и пациента в медицинских учреждениях при проведении медицинских процедур для достижения необходимых санитарно-гигиенических норм в отделениях и кабинетах ЛПУ.

Маска применяется для индивидуальной защиты путем создания механический барьер для бактерий, вирусов, микробов, находящихся во вдыхаемом воздухе, для медицинского персонала и пациентов в лечебных учреждениях.

Стекло предметное применяется для проведения микроаналитических исследований в клиничко-диагностических лабораториях.

Транспортный контейнер или пенал применяется для транспортировки микропрепаратов, нанесенных на предметные стекла в рамках контроля качества лабораторных исследований в цитологии, гистологии и бактериоскопии.

Контейнер применяется для сбора, хранения и транспортировки образцов биологических материалов, а также иных твердых или жидких образцов для дальнейшего лабораторного исследования.

Набор поставляется стерильным в герметичной упаковке.

Способ стерилизации – газовый (окисью этилена).

Набор предназначен для одноразового использования.

Масса набора должна быть не более 1 кг, масса каждого изделия, входящего в состав набора, должна быть не более 0,1 кг.

Меры предосторожности:

- Не допускается повторное использование изделий. Повторное использование может привести к увеличению риска возникновения инфекции и перекрестной контаминации, а также к утрате физических свойств изделия, необходимых для его использования по назначению.
- Наборы с истекшим сроком годности должны быть утилизированы.
- Следует соблюдать особую осторожность при применении в случае беременности пациентки.

Указания по эксплуатации

Набор при эксплуатации устойчив к климатическим воздействиям для климатического исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150. Изделия, входящие в состав набора, которые эксплуатируются внутри органов и полостей человека, устойчивы к климатическим воздействиям для климатического исполнения У6 по ГОСТ Р 50444 и воздействиям биологических жидкостей и выделений тканей организма, с которыми они контактируют в процессе эксплуатации.

Наборы должны использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным медицинским персоналом. Визуальным осмотром определить целостность потребительской упаковки. Убедиться в действии срока годности набора. С соблюдением правил асептики вскрыть потребительскую упаковку. Использовать инструменты в соответствии с предназначением конкретного инструмента. Осмотр должен производиться с соблюдением общепринятых правил асептики.

Эксплуатация комплектующих набора при повреждении упаковки, при наличии неоднородного сварного шва или по истечению срока годности запрещена.

Соблюдать особую осторожность в случае беременности пациентки.

Использовать инструменты непосредственно после вскрытия потребительской упаковки. Применять инструменты только по назначению.

Не допускается повторное применение. Использованные комплектующие набора утилизировать, соблюдая правила утилизации.

Не использовать не по назначению.

Материалы и марки

Изделия, входящие в состав наборов изготовлены из материалов, указанных в таблице 2.

Таблица 2

№	Компонент	Наименование, марка материала	Производитель
1.	Зеркало гинекологическое полимерное стерильное по Куско в вариантах исполнения: тип A1, тип A2, тип A4, тип B1, тип B2, тип B3, тип D1, тип D2, тип G, тип E1 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6883)	Створки зеркала изготовлены из полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003, или из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003. Фиксатор (исполнения тип А, В, D, G) изготовлен из смеси полипропилена марки PP 4445S ТУ 20.16.51-136-05766801-2015 и красителя - концентрата «Баско» ТУ 2243-001-23124265-2000. Створки зеркал (исполнения тип А, В, D, G, E) изготавливаются с металлизированным покрытием из крупки из электролитического рафинированного хрома чистотой 99,9 % Cr марки ЭРХ 99,9-МП (наносится поверх полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003) Для получения антибликового эффекта изготавливаются створки зеркал (исполнения тип А, В, D, G, E) из смеси полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003 и красителя - концентрата «Баско» марки П 0206/10-ПС (цвет оранжевый прозрачный) ТУ 2243-001-23124265-2000	ООО "Медицинские изделия", Россия
2.	Перчатки из пленки полимерной (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10269)	синтетический ПВХ (поливинилхлорид), внутренняя поверхность неопудренная (полиуретановое покрытие) или полимерный материал на основе нитрильного каучука, внутренняя поверхность неопудренная (полиуретановое покрытие)	«ЛЕБОО ХЕЛСКЭА ПРОДАКТС ЛИМИТЕД», Китай

	или Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05130)	Латекс, опудренные модифицированным кукурузным крахмалом	«Топ Глав Сди Бхд», Малайзия
	или Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные одноразовые, торговой марки Bi-Safe (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6102)	нитриловые.	«ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани», Вьетнам
	или Перчатки латексные медицинские смотровые гладкие опудренные одноразовые, торговой марки Bi-Safe (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6104)	Латекс, опудренные	«ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани», Вьетнам
	или Перчатки латексные медицинские смотровые текстурированные неопудренные одноразовые, торговой марки Bi-Safe (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6105)	латекс	«ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани», Вьетнам
	Перчатки медицинские диагностические одноразовые (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08547)	латекс, опудренные	АО "АЗРИ", Россия
3.	Зонд тип А1 универсальный (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Ручка зонда тип А универсального изготовлена из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801- 2003, рабочая часть зонда тип А универсального (исполнение А1, А2, А4) – из вязкого флока или флока полиамидного производства SwissFlock AG (Швейцария) или Fratelli Casati s.p.a., Италия (наносится поверх полистирола), закрепленного с помощью клея АФА400 (дисперсия на основе синтетических смол). Рабочая часть (насадка спиральная) зонда тип А универсального (исполнение А4) должна изготовлена из резиновой смеси 52-336/4 ТУ 38.103212-76 (надевается поверх полистирола марки 825).	ООО "Медицинские изделия", Россия
4.	Зонд тип А2 универсальный (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)		
5.	Зонд тип А4 универсальный (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)		

№	Компонент	Наименование, марка материала	Производитель
6.	Зонд тип В1 ложка Фолькмана (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Полистирол марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003	ООО "Медицинские изделия", Россия
7.	Зонд тип В2 ложка Фолькмана (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058 от 23.04.2018 года)		
8.	Зонд тип D1 цитощетка (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Ручка зонда тип D цитощетки - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003. Рабочая часть зонда тип D цитощетки (исполнение D1, D2, D3, D4) - из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной мононити (из полиамида - 6), ТУ 2272-002-76663424-2014. Шарик на конце рабочей части зонда тип D цитощетка (исполнение D2, D4) - из полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003.	ООО "Медицинские изделия", Россия
9.	Зонд тип D2 цитощетка (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)		
10.	Зонд тип D3 цитощетка (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)		
11.	Зонд тип D4 цитощетка (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)		
12.	Зонд тип E1 шпатель гинекологический двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Полистирол марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003	ООО "Медицинские изделия", Россия
13.	Зонд тип E2 шпатель гинекологический двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)		
14.	Зонд тип E3 шпатель гинекологический двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)		
15.	Зонд тип F1 комбинированный (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда тип F комбинированного (исполнение F1, F2, F3, F5) - из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337. Ручка зонда тип F комбинированного, съёмник зонда тип F комбинированного (исполнение F5) - из полистирола	ООО "Медицинские изделия", Россия
16.	Зонд тип F2 комбинированный (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)		
17.	Зонд тип F3 комбинированный (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)		
18.	Зонд тип F5 комбинированный (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)		

№	Компонент	Наименование, марка материала	Производитель
19.	Зонд тип В1-1-Е5-1 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочие части зонда В1-1 и Е5-1 и ручка зонда- из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003	ООО "Медицинские изделия", Россия
20.	Зонд тип D1-E1-2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D1- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, рабочая часть зонда E1-2 и ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	
21.	Зонд тип D1-E3-1 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть D1- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, рабочая часть зонда E3-1 и ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	
22.	Зонд тип D1-F1 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D1- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, рабочая часть зонда F1- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	
23.	Зонд тип D1-F2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D1- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, рабочая часть зонда F2- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	
24.	Зонд тип D1-F3 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D1- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, рабочая часть зонда F3- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	
25.	Зонд тип D2-F1 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D2- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, шарик на конце рабочей части зонда D2 - из полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003, рабочая часть зонда F1- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	
26.	Зонд тип D2-F2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D2- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, шарик на конце рабочей части зонда D2 - из полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003, рабочая часть зонда F2- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	

№	Компонент	Наименование, марка материала	Производитель
27.	Зонд тип D2-F3 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D2- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, шарик на конце рабочей части зонда D2 - из полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003, рабочая часть зонда F3- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	ООО "Медицинские изделия", Россия
28.	Зонд тип D3-F1 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D3- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, рабочая часть зонда F1- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	
29.	Зонд тип D3-F2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D3- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, рабочая часть зонда F2- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	
30.	Зонд тип D3-F3 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D3- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, рабочая часть зонда F3- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	
31.	Зонд тип D4-F1 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D4- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, шарик на конце рабочей части зонда D4 - из полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003, рабочая часть зонда F1- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	
32.	Зонд тип D4-F2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D4- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, шарик на конце рабочей части зонда D4 - из полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003, рабочая часть зонда F2- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	

№	Компонент	Наименование, марка материала	Производитель
33.	Зонд тип D4-F3 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D4- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, шарик на конце рабочей части зонда D4 - из полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003, рабочая часть зонда F3- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	ООО "Медицинские изделия", Россия
34.	Зонд тип D1-H2-2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D1- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, рабочая часть зонда H2-2 тампон - из пенополиуретана марки ППУ ЭО-130 ТУ 6-55-53-91, закрепленного на ручке зонда с помощью клея АФА400 (дисперсия на основе синтетических смол), ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	ООО "Медицинские изделия", Россия
35.	Зонд тип D2-H2-2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D2- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, шарик на конце рабочей части зонда D2 - из полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003, рабочая часть зонда H2-2 тампон - из пенополиуретана марки ППУ ЭО-130 ТУ 6-55-53-91, закрепленного на ручке зонда с помощью клея АФА400 (дисперсия на основе синтетических смол), ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	ООО "Медицинские изделия", Россия
36.	Зонд тип D3-H2-2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D3- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, рабочая часть зонда H2-2 тампон - из пенополиуретана марки ППУ ЭО-130 ТУ 6-55-53-91, закрепленного на ручке зонда с помощью клея АФА400 (дисперсия на основе синтетических смол), ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	ООО "Медицинские изделия", Россия
37.	Зонд тип D4-H2-2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда D4- из проволоки марки Ст65Г ГОСТ 14959, полиамидной монопнити (из полиамида – 6), ТУ 2272-002-76663424-2014, шарик на конце рабочей части зонда D4 - из полистирола марки 525 ТУ 2214-126-05766801-2003, рабочая часть зонда H2-2 тампон - из пенополиуретана марки ППУ ЭО-130 ТУ 6-55-53-91, закрепленного на ручке зонда с помощью клея АФА400 (дисперсия на основе синтетических смол), ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	ООО "Медицинские изделия", Россия

№	Компонент	Наименование, марка материала	Производитель
38.	Зонд тип F1-H2-2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда F1- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, рабочая часть зонда тип H2-2 тампон - из пенополиуретана марки ППУ ЭО-130 ТУ 6-55-53-91, закрепленного на ручке зонда с помощью клея АФА400 (дисперсия на основе синтетических смол), ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	ООО "Медицинские изделия", Россия
39.	Зонд тип F2-H2-2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда F2- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, рабочая часть зонда тип H2-2 тампон - из пенополиуретана марки ППУ ЭО-130 ТУ 6-55-53-91, закрепленного на ручке зонда с помощью клея АФА400 (дисперсия на основе синтетических смол), ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	ООО "Медицинские изделия", Россия
40.	Зонд тип F3-H2-2 двухсторонний (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7058)	Рабочая часть зонда F3- из полиэтилена марки 15813-020 ГОСТ 16337, рабочая часть зонда тип H2-2 тампон - из пенополиуретана марки ППУ ЭО-130 ТУ 6-55-53-91, закрепленного на ручке зонда с помощью клея АФА400 (дисперсия на основе синтетических смол), ручка зонда двухстороннего - из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.	ООО "Медицинские изделия", Россия
41.	Салфетка (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09345)	спанбонд	ООО "Гекса-нетканые материалы", Россия
42.	Пеленки впитывающие, одноразовые «Слюпе» для взрослых и детей (Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1714)	1 слой - материал нетканый «Спанбонд», состав полипропилен – 100%, с гидрофильной добавкой 2 слой – бумага из древесной целлюлозы, состав- древесная первичная целлюлоза – 100% 3 слой – целлюлоза распушенная, состав- древесная первичная целлюлоза – 100% 4 слой супер абсорбент, состав – полиарилат натрия 100% 5 слой – бумага из древесной целлюлозы, состав- древесная первичная целлюлоза – 100% 6 слой – полиэтиленовая пленка, состав – полиэтилен высокого давления – 100%	ООО "КЛЕОН", Россия
43.	Пеленки медицинские одноразовые по ТУ 13.95.10-020-74582615-2017 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6949)	Нетканые материалы типов СМС, СС и В Цвет пеленок изготовленных из материалов типов СС, СМС и В -белый (натуральный) или голубой или желтый или розовый или зеленый или фиолетовый. Цвет пеленок изготовленных из материала типа спанлейс -белый (натуральный).	ООО «Завод Эластик», Россия
44.	Стекло предметное (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10371)	стекло	"Янчэнг Хунда Медикал Инструментс Ко., Лтд.", Китай
45.	Стекло предметное СП-7102 с необработанными краями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2981)	силикатное стекло	ООО "МиниЛаб" Россия

№	Компонент	Наименование, марка материала	Производитель
46.	Транспортный контейнер для микропрепаратов (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05515)	полипропилен	ДЕЛЬТАЛАБ С.Л., Испания
47.	Пенал для предметных стекол (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07661)	полипропилен	"Лп Италиана С.п.А.", Италия
48.	Бахилы медицинские артикул ГСТ23Г или ГСТ28Г или ГОПТ30Г или ГОПТ35Г или ГОПТ40Г или ГПР45Г или ГПР50Г или ГОПР60Г или ГОПР80Г (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5146)	полиэтилен низкого давления, одинарная витая оплетенная резинка	ООО "Парамедикум" Россия
49.	Бахилы в вариантах исполнения: - низкие из нетканого материала длиной 38,0 см и высотой 15,0 см, или 18,0 см или 20,0 см или - высокие из нетканого материала длиной 38,0 см и высотой 40,0 см или 50,0 см или	нетканый материал СС, СМС, резинка	ООО «НПК «САНИТАС», Россия
	- низкие полиэтиленовые длиной 38,0 см и высотой 15,0 см или 18,0 см или 20,0 см или	ПЭВД, ПЭНД, ПЭВД/ ПЭНД, резинка	
	- низкие 2-х слойные длиной 38,0 см и высотой 15,0 см или 18,0 см или 20,0 см (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4809)	ПЭВД/ ПЭНД, резинка СС или СМС/ ПЭВД или ПЭНД, резинка	
50.	Бахилы в вариантах исполнения низкие или высокие (Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06234)	полипропиленовый нетканый материал спанбонд, резинка	ООО «Гекса-нетканые материалы», Россия
51.	Бахилы в вариантах исполнения хирургические (высокие или низкие) или бахилы на ступню (носки) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/823)	многослойный нетканый материал СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд), резинка	ЗАО «ЗДРАВМЕДТЕХ-П», Россия
52.	Шапочка «Берет» (Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06234)	полипропиленовый нетканый материал, резинка	ООО «Гекса - нетканые материалы», Россия
53.	Шапочка (берет) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/823)	многослойный нетканый материал СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд), резинка	ЗАО «ЗДРАВМЕДТЕХ-П», Россия

№	Компонент	Наименование, марка материала	Производитель
54.	Шапочка «Шарлотта» в вариантах исполнения: - плотность 17 г/м ² , с двойной резинкой или - плотность 20 г/м ² , с двойной резинкой или - плотность 25 г/м ² , с двойной резинкой (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4829)	нетканый материал, резинка	ООО «НПК» САНИТАС» Россия
55.	Маска медицинская из нетканого материала одноразовая (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08512)	нетканый материал, гибкий носовой фиксатор, ушные резинки	ООО "МАСКА", Россия
56.	Маски медицинские трехслойные одноразовые в вариантах исполнения МБ175Б или МС175Б или МС175С (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5736)	нетканый материал, гибкий носовой фиксатор, резинки	ООО «КЛЕВЕР-ПРО», Россия
57.	Маска хирургическая в вариантах исполнения: на завязках или на резинках (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/823)	полипропиленовый нетканый термоскрепленный материал, фильтрующий элемент (промежуточный слой) - мейлблаун (нетканый материал, полученный из полипропиленовых микроволокон, носовой фиксатор, резинка	ЗАО «ЗДРАВМЕДТЕХ-П», Россия
58.	Контейнеры для биопроб полимерные в вариантах исполнения: -Контейнер для биопроб 30 мл полимерный или -Контейнер для биопроб 30 мл со шпателем полимерный или -Контейнер для биопроб 60 мл полимерный или -Контейнер для биопроб 60 мл со шпателем полимерный или -Контейнер для биопроб 100 мл полимерный или -Контейнер для биопроб 100 мл со шпателем полимерный или -Контейнер для биопроб 120 мл полимерный или -Контейнер для биопроб 120 мл со шпателем полимерный, (Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1706)	Корпус– из полипропилена марки РР 4445S по ТУ 20.16.51-136-05766801-2015 или полипропилена марки РР 4445Т по ТУ 20.16.51-136-05766801-2015. Крышки контейнеров (30,60,100,120 мл) и шпатель контейнера (30 мл) – из полиэтилена низкого давления марки ПЭНТ22-12 по ТУ 2243-176-00203335-2007 окрашенного красителем - концентрат «Баско» марки П1105/02-ПЭ по ТУ 2243-001-23124265-2000, производства ООО НПФ «Барс-2», Россия. Шпатель контейнера 60 мл, 100 мл, 120 мл – из полистирола марки 825 по ТУ 2214-126-05766801-2003 и красителя - концентрат «Баско» марки П3010/01-ПС по ТУ 2243-001-23124265-2000	ООО «Полимерные изделия», Россия
59.	Контейнер одноразовый медицинский полимерный (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07338)	полипропилен	ЗАО "Перинт", Россия
60.	Вкладыш-направление	Типографская краска марки RISO, серии EZ. Бумага по СТО 00279404-001-2013 Бумага по СТО 00253497-002-2012	ООО «Медицинские изделия», Россия

Способ применения

Зеркало гинекологическое полимерное стерильное по Куско

- соблюдая правила асептики, вскрыть упаковку с зеркалом и извлечь зеркало;
- проверить целостность зеркала, надежность соединения створок между собой и надежность крепления фиксатора методом визуального осмотра;
- створки зеркала перед применением сомкнуть;
- ввести зеркало;
- створки зеркала развести на требуемый угол путем приложения усилий на ручку нижней и верхней створок, смыкая их;
- зафиксировать створки зеркала в нужном положении;
- провести манипуляции;
- по окончании манипуляции вывести створки зеркала из фиксирующего положения тем самым размыкая ручки нижней и верхней створок;
- извлечь зеркало.

Зеркало гинекологическое полимерное стерильное по Куско тип Е1:

- соблюдая правила асептики, вскрыть упаковку с зеркалом и извлечь зеркало;
- проверить целостность зеркала, надежность соединения створок между собой методом визуального осмотра;
- створки зеркала перед применением сомкнуть;
- ввести зеркало;
- приложить усилие к рукоятке верхней створки приподнимая ее при этом фиксирующие зубья поочередно проходят зацепления за кромки в рукоятке нижней створки.
- провести манипуляции;
- по окончании манипуляции вывести створки зеркала из фиксирующего положения путем приложения усилия к рукоятке верхней створки опуская ее при этом фиксирующие зубья выходят из зацепления за кромки в рукоятке нижней створки;
- извлечь зеркало.

Зонд тип А универсальный:

- извлеките зонд из упаковки;
- погрузите зонд в уретру или цервикальный канал;
- медленно поверните зонд в обе стороны;
- извлеките зонд и перенесите материал с поверхности зонда на предметное стекло;
- при необходимости отправки материала в лабораторию, отломите конец зонда и поместите его в транспортную пробирку, расположенную в полый ручке зонда. Покрытие зонда обеспечивает качественное взятие биологического материала.

Зонд тип В ложка Фолькмана:

Взятие материала для исследования из уретры:

- при наличии большого количества выделений наружное отверстие уретры должно быть очищено с помощью марлевого тампона;
- при отсутствии свободных выделений может быть проведен легкий массаж уретры, выполняемый врачом;
- извлеките зонд из упаковки;
- после введения зонда в уретру на 1-2 см необходимо плоскость «глазка» петли двигать к наружному отверстию, слегка нажимая на заднюю и боковые стенки уретры;
- для микроскопического и иммунофлюоресцентного исследования после получения клинического материала петля накладывается на поверхность стекла и передвигается по нему несколько раз с легким нажатием. Петля должна оставить на стекле тонкую полоску клинического материала;

- для культурального исследования и исследования методом ПЦР материал помещается в соответствующие пробирки с транспортной средой.

Взятие материала для исследования из цервикального канала:

- необходимо тщательно очистить наружное отверстие цервикального канала при помощи марлевого тампона от вагинальных выделений для предотвращения возможной контаминации;
- извлеките зонд из упаковки;
- после введения зонда в шеечный канал на 1-2 см его вращают несколько раз;
- для микроскопического и иммунофлюоресцентного исследования клинический материал должен быть перенесен с тампона на стекло как можно более тонким слоем;
- для культурального исследования и исследования методом ПЦР материал помещается в соответствующие пробирки с транспортной средой;
- цервикальные мазки не берутся у девочек препубертатного возраста. При подозрении на ИППП в этом возрасте мазки берутся из преддверия влагалища;
- у женщин после гистерэктомии мазки на *C.trachomatis* и *M.gonorrhoeae* берутся из уретры, вагины и ануса;
- для микроскопического исследования вагинального отделяемого материал берется (также с помощью зеркала) зондом с заднего свода влагалища и тонким слоем распределяется на предметном стекле (для исследования на *Trichomonas vaginalis*).

Зонд тип D цитощетка:

- извлеките зонд из упаковки;
- введите зонд в цервикальный канал;
- обеспечьте соприкосновение цервикального канала с ворсистой поверхностью инструмента и поверните его по и против часовой стрелки для сбора материала;
- извлеките зонд;
- переместите биологический материал на предметное стекло, зафиксируйте отпечаток.

Зонд тип Е шпатель гинекологический двухсторонний:

Концы рабочих поверхностей инструмента имеют различную форму и размер, что позволяет проводить качественный забор материала с поверхности слизистой оболочки органа.

Чтобы получить соскоб с поверхности органа, делается полный оборот шпателя с легким надавливанием. Затем материал со шпателя наносится на обезжиренное стекло, высушивается на воздухе или фиксируется при помощи специального аэрозоля.

Зонд тип F комбинированный:

- извлеките зонд из упаковки;
- введите зонд в цервикальный канал;
- обеспечьте соприкосновение цервикального канала с ворсистой поверхностью инструмента и поверните его по и против часовой стрелки для сбора материала;
- извлеките зонд;
- переместите биологический материал на предметное стекло, зафиксируйте отпечаток.

Примечание:

При необходимости направить материал в лабораторию отсоедините рабочую часть зонда с биологическим материалом (исполнение F5) и поместите ее в контейнер для транспортировки в лабораторию.

Зонд двухсторонний:

Зонды двусторонние представляют собой зонд с рабочими частями 2х типов зондов согласно обозначению и применяются в соответствии с указаниями, соответствующими каждой рабочей части.

Зонд тип H2 тампон

Взятие материала для приготовления мазка – отпечатка:

- извлеките зонд из упаковки,
- отберите на него необходимое количество биологического материала,
- собранный на тампоне материал перенесите на предметное стекло,
- отобранную пробу немедленно доставьте в лабораторию.

Перчатки

Перед надеванием нестерильных или стерильных перчаток проводится гигиеническая обработка рук или обработка рук. Перчатки надевают только после полного высыхания антисептика на коже рук.

Вначале перчатка надевается на доминантную (правую) руку;

- большим и указательным пальцами левой руки захватить край вывернутой наизнанку манжеты правой перчатки и надеть ее на правую руку, не касаясь наружной стерильной поверхности перчатки. Манжета остаётся вывернутой;
- пальцы правой руки, на которые уже надета перчатка, подвести под отворот манжеты левой перчатки и надеть ее на левую руку, не касаясь кожи и изнаночной стороны манжеты;
- расправить манжету левой перчатки;
- развернуть вывернутый край манжеты правой перчатки аналогичными круговыми движениями.

После снятия перчаток проводится гигиеническая обработка кожи рук антисептиками.

Салфетка, Пеленка

Перед проведением профилактических осмотров и различных лечебно-диагностических манипуляций салфетку, пеленку, необходимо расположить на гинекологическом кресле при соблюдении правил асептики.

Стекло предметное

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Стекло не должно подвергаться ударам в процессе эксплуатации.

Транспортный контейнер для микропрепаратов, пенал для предметных стекол

Выбор транспортного контейнера для микропрепаратов определяется количеством стекол, подлежащих транспортировке. Поместить стекло(а) в транспортный контейнер или пенал, плотно закрыть крышку, надписать контейнер маркером и отправить выбранным видом транспорта.

Бахилы

Одеть бахилы на обувь пациента, вымыть руки.

Шапочка

Шапочку в виде гофрированной полоски, сложенной зигзагообразно, расправить и одеть на голову, волосы убрать под шапочку.

Маска медицинская

Одеть маску цветной стороной и креплениями ушных петель (резинок) или завязок наружу. Убедиться в удобном прилегании фиксатора для носа на переносице. Расправьте маску внизу на подбородке. Закрепите петли (резинки) за ушами или завяжите завязки, если маска поставляется с завязками. Убедитесь, что маска плотно прилегает к лицу для обеспечения личной безопасности.

Контейнер

Непосредственно перед отбором пробы вскрыть потребительскую упаковку, открыть крышку, наполнить контейнер биоматериалом, плотно закрыть крышку.

Условия эксплуатации

Набор при эксплуатации должен быть устойчив к климатическим воздействиям для климатического исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150. Изделия, входящие в состав набора, которые эксплуатируются внутри органов и полостей человека и должны быть устойчивы к климатическим воздействиям для климатического исполнения У6 по ГОСТ Р 50444 и воздействиям биологических жидкостей и выделений тканей организма, с которыми они контактируют в процессе эксплуатации.

Утилизация

Набор должен утилизироваться согласно правилам, установленным СанПиН 2.1.7.2790.

Использованный набор относится к отходам класса Б согласно СанПиН 2.1.7.2790.

Набор, неиспользованный по причине окончания срока годности или повреждения упаковки, относится к классу А согласно СанПиН 2.1.7.2790 и утилизируется как бытовые отходы.

Внимание! Набор стерилен, нетоксичен.

Внимание! Набор выпускается стерильным и предназначен для одноразового использования.

Метод стерилизации

Газовый (оксидом этилена).

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие наборов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и правил эксплуатации.

Гарантийный срок сохранения стерильности набора – 5 (пять) лет.

Условия хранения и транспортирования

Транспортировка должна производиться в закрытых транспортных средствах в соответствии с действующими на транспорте каждого вида правилами, утвержденными в установленном порядке. Условия транспортирования – по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Наборы должны храниться в групповой или транспортной упаковке по условиям хранения 1(Л) по ГОСТ 15150 при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных

приборов. Избегать воздействия прямых солнечных лучей и значительных колебаний температуры во время хранения.

После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия должны быть выдержаны в транспортной таре в условиях хранения не менее 12 часов до использования.

Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия

Набор имеет полностью законченную конструкцию и не требует в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту.

Требования к охране окружающей среды

Набор при использовании, транспортировании и хранении не оказывают негативного воздействия на человека и окружающую среду.

Риски применения медицинского изделия

В рамках процедуры производителем были определены опасности, связанные с использованием, конструкцией и процедурами. Опасности с неприемлемым уровнем риска были сокращены до приемлемого уровня путем изменения конструкции, проведения испытаний и других взаимоприемлемых мер. На основании анализа были выявлены и сокращены до приемлемых уровней все установленные и предвидимые заранее опасности и сопутствующие риски.

Сведения о рекламациях

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – производителю ООО «Медицинские изделия» по адресу: 420061, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д.39, оф. 102.

Тел.: (843) 279-69-03, e-mail: info@medizdelie.ru.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские изделия» (ООО «Медицинские изделия»).

Юридический адрес: 420061, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д.39, оф. 102. Тел.: (843) 279-69-03, e-mail: info@medizdelie.ru.

Место производства медицинского изделия

140500, Московская область, Луховицкий район, г. Луховицы, пр. Строителей, вл.7, строен. 3.

Перечень применяемых производителем (изготовителем) медицинского изделия национальных стандартов

- ГОСТ ISO 11607-1-2018 «Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам».
- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Общие требования».
- ГОСТ ISO 10993-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий».
- ГОСТ Р 52770-2020 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Часть 1. Общие требования биологической безопасности».

Инструкция по применению предоставляется потребителю в сокращенном виде на фактический вариант исполнения набора. Ознакомление с полной версией инструкции на набор, возможно связавшись с производителем Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские изделия» (ООО «Медицинские изделия»).

Юридический адрес: 420061, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Космонавтов, д.39, оф. 102. Тел.: (843) 279-69-03, e-mail: info@medizdelie.ru.

Символы, наносимые на маркировку:

	Стерилизация оксидом этилена		Не допускать воздействия солнечного света
	Одноразовое использование		Беречь от влаги
	Не использовать при повреждении упаковки		Хрупкое, обращаться осторожно
	Температурный диапазон		Верх
	Диапазон влажности		Пределы температуры
	Обратитесь к инструкции по применению		Знак соответствия при декларировании
	Знак соответствия при добровольной сертификации		

всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

61/шестьдесят один листа (ов)

Генеральный директор
ООО «Медицинские изделия»



Д.Ф. Галимов