


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Лоток стоматологический для хирургического набора NobelActive® Guided PureSet Tray




Лоток стоматологический для хирургического набора NobelParallel Conical Connection (CC) Guided PureSet Tray;

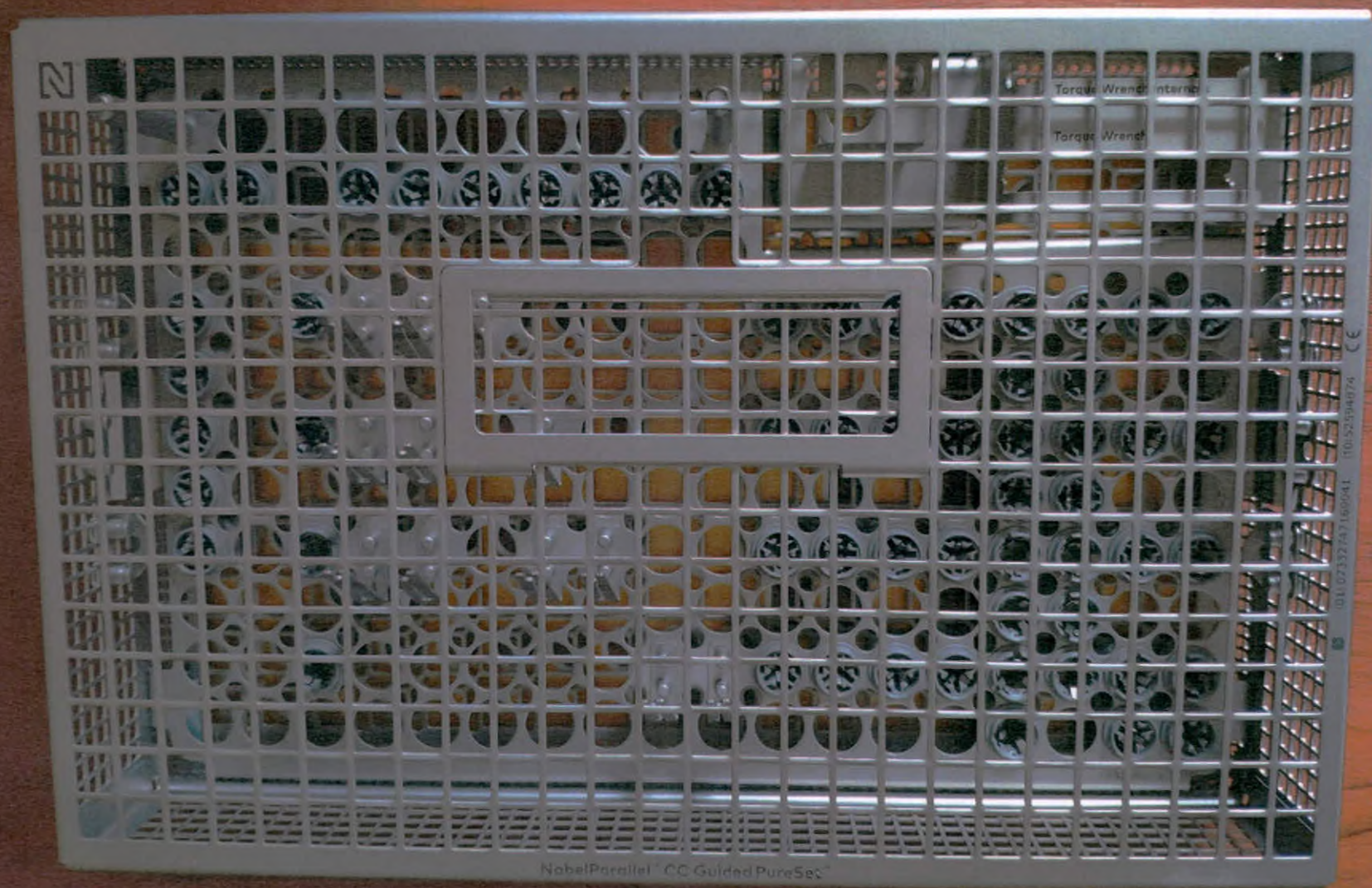


Лоток стоматологический для хирургического набора NobelReplace® Conical Connection (CC) Guided PureSet Tray;




Лоток стоматологический для ортопедического набора Prosthetic PureSet Tray;

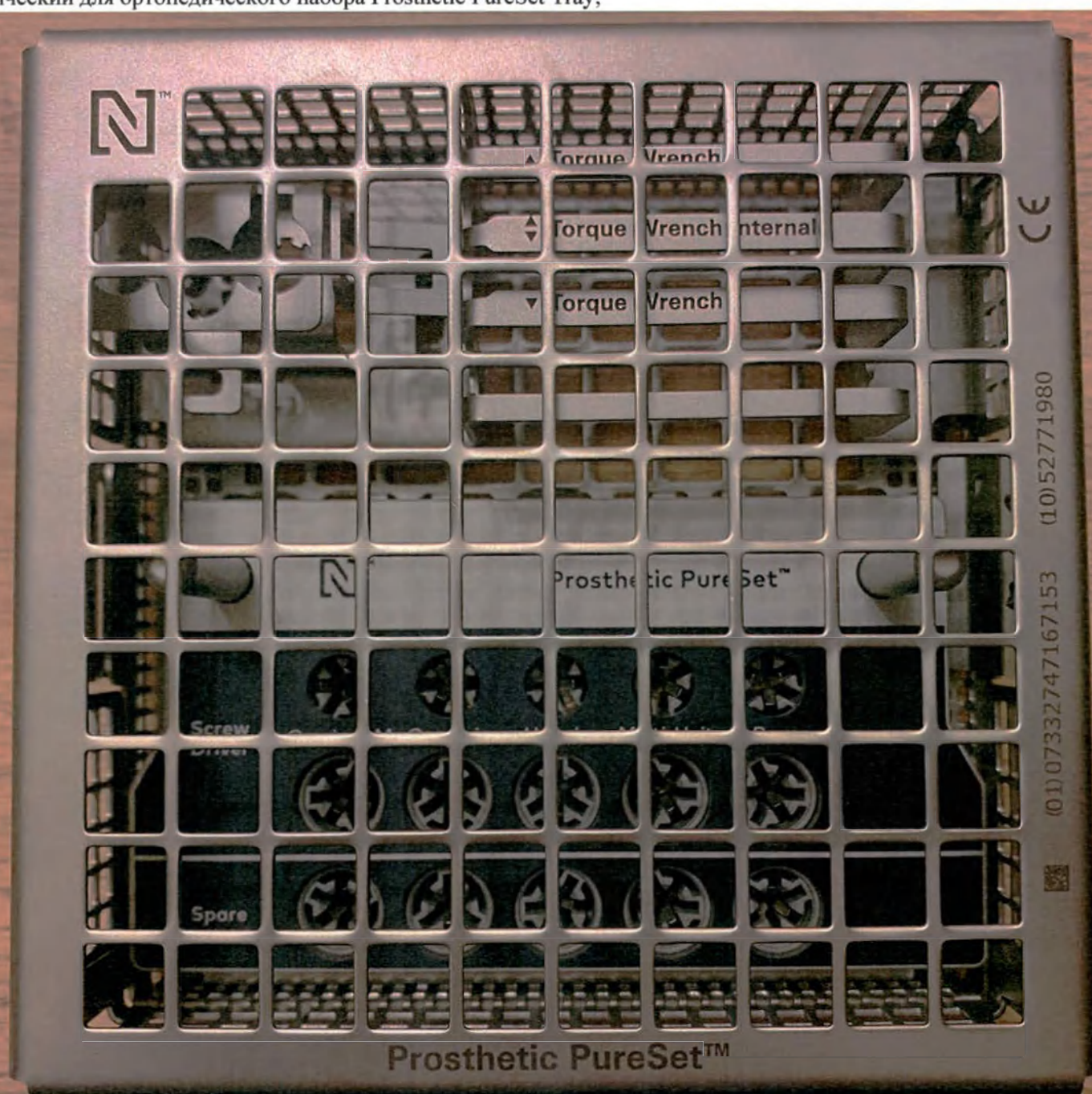



Лоток стоматологический для хирургического набора Nobel Biocare N1 PureSet Tray;

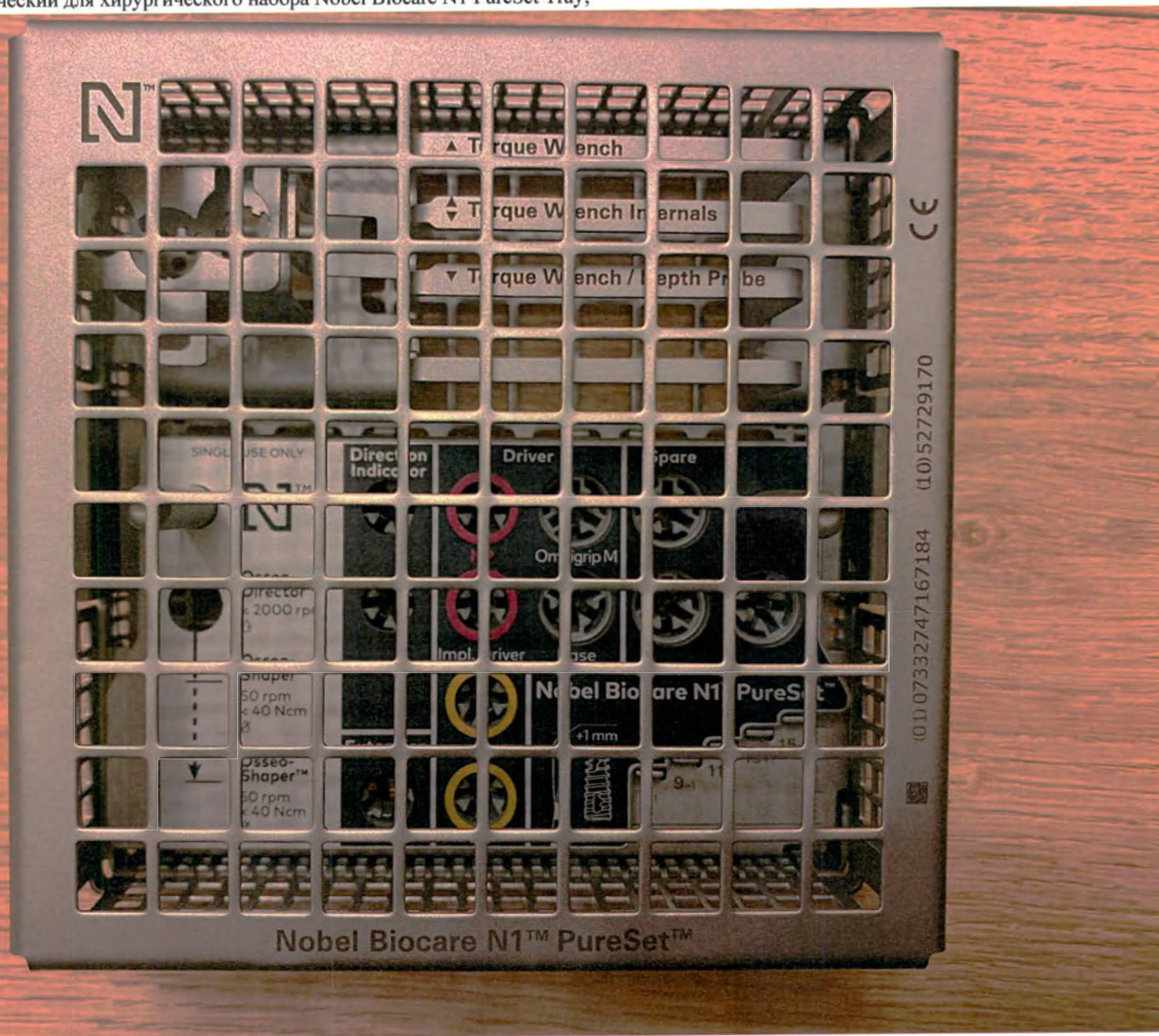

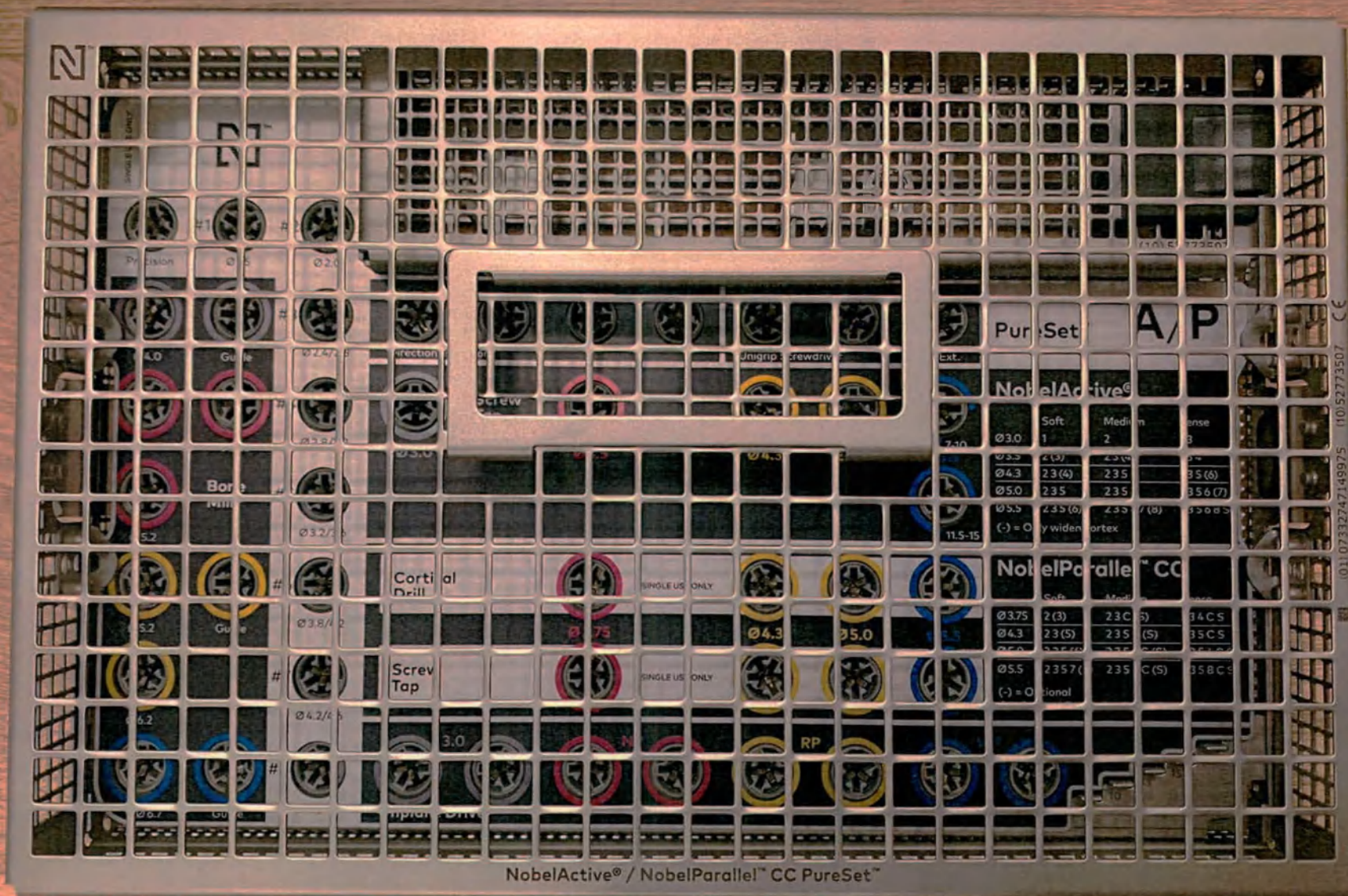



Лоток стоматологический для хирургического набора NobelReplace® CC PureSet Tray;

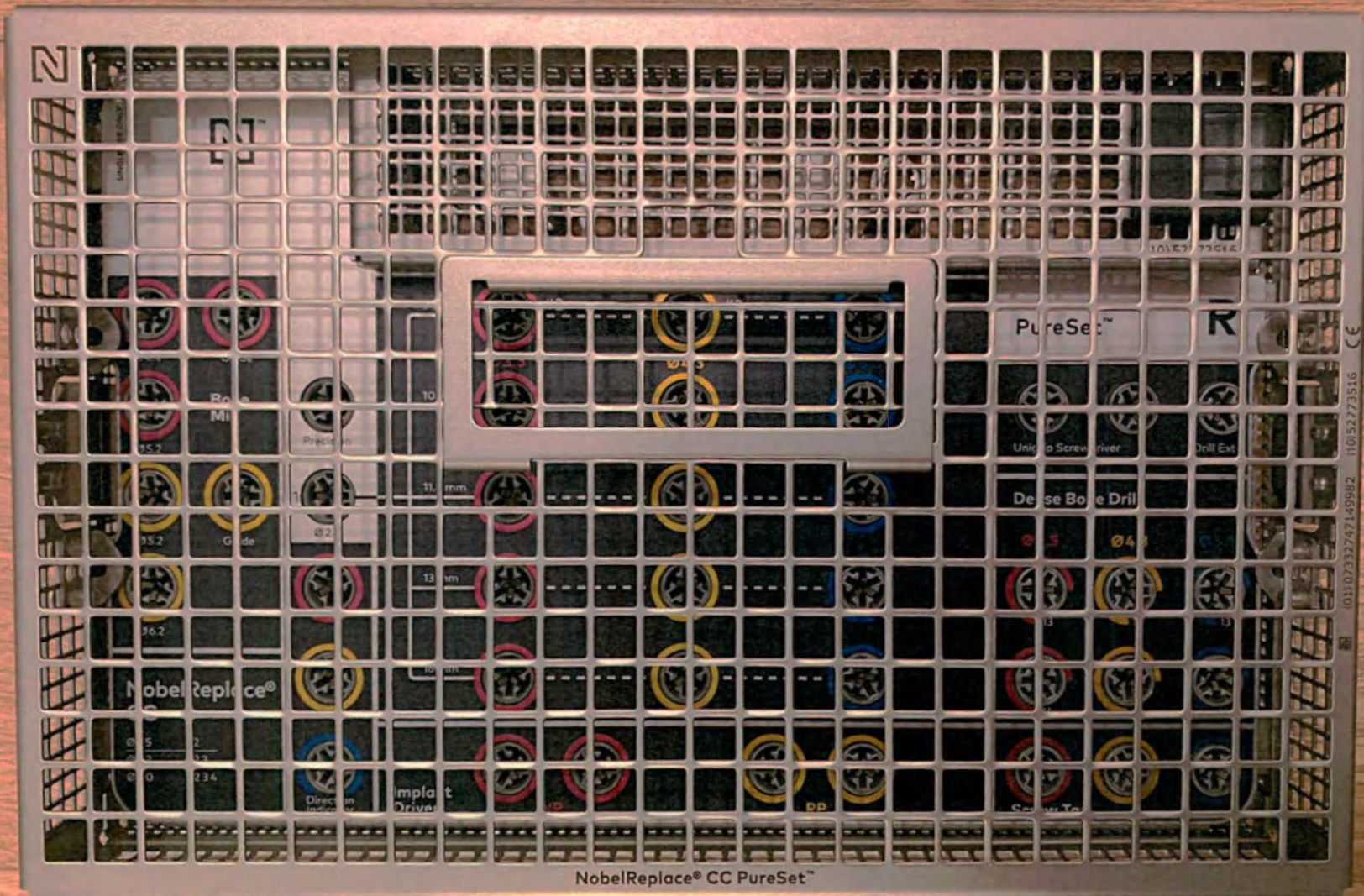


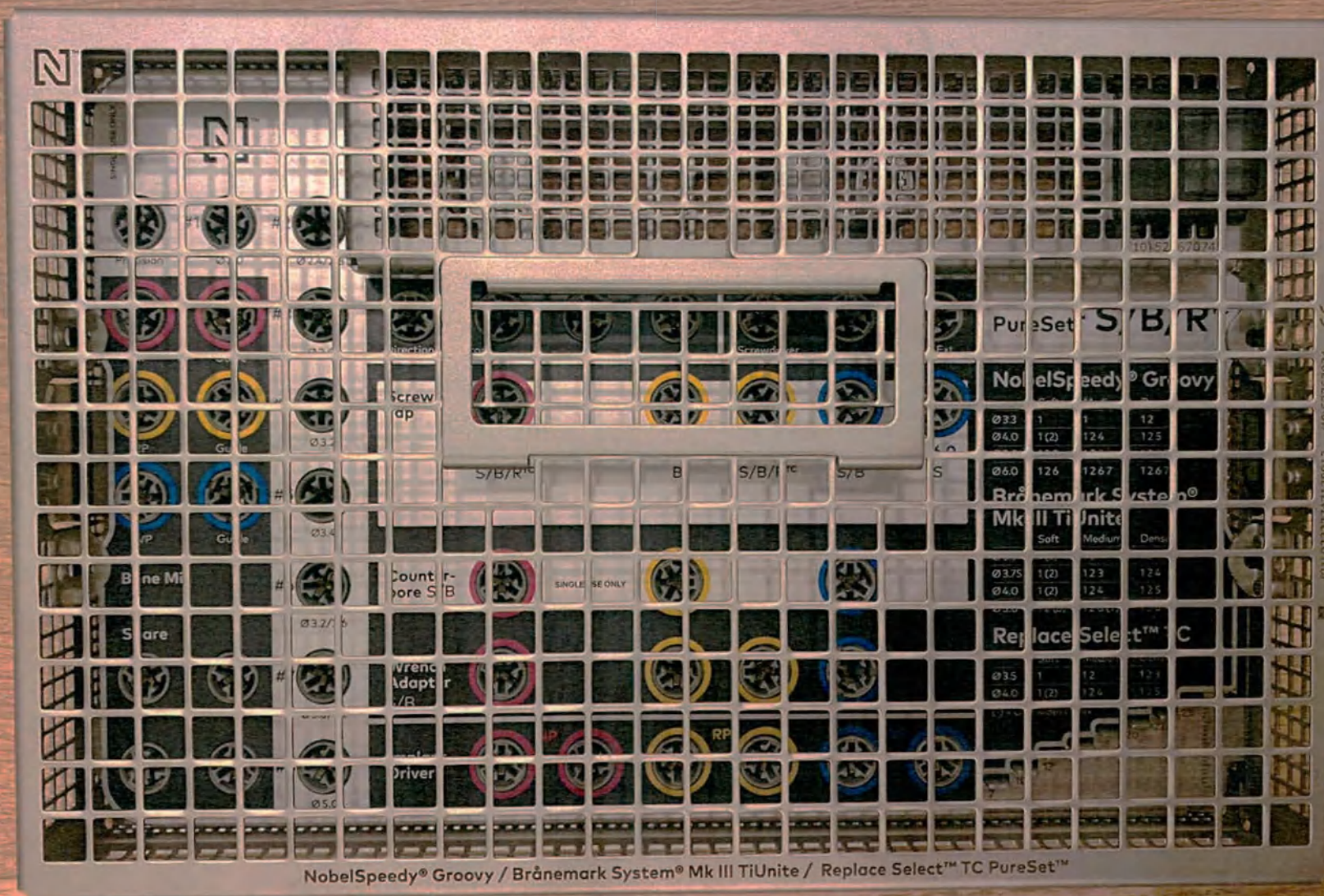



Лоток стоматологический для хирургического набора Trefoil PureSet Tray;

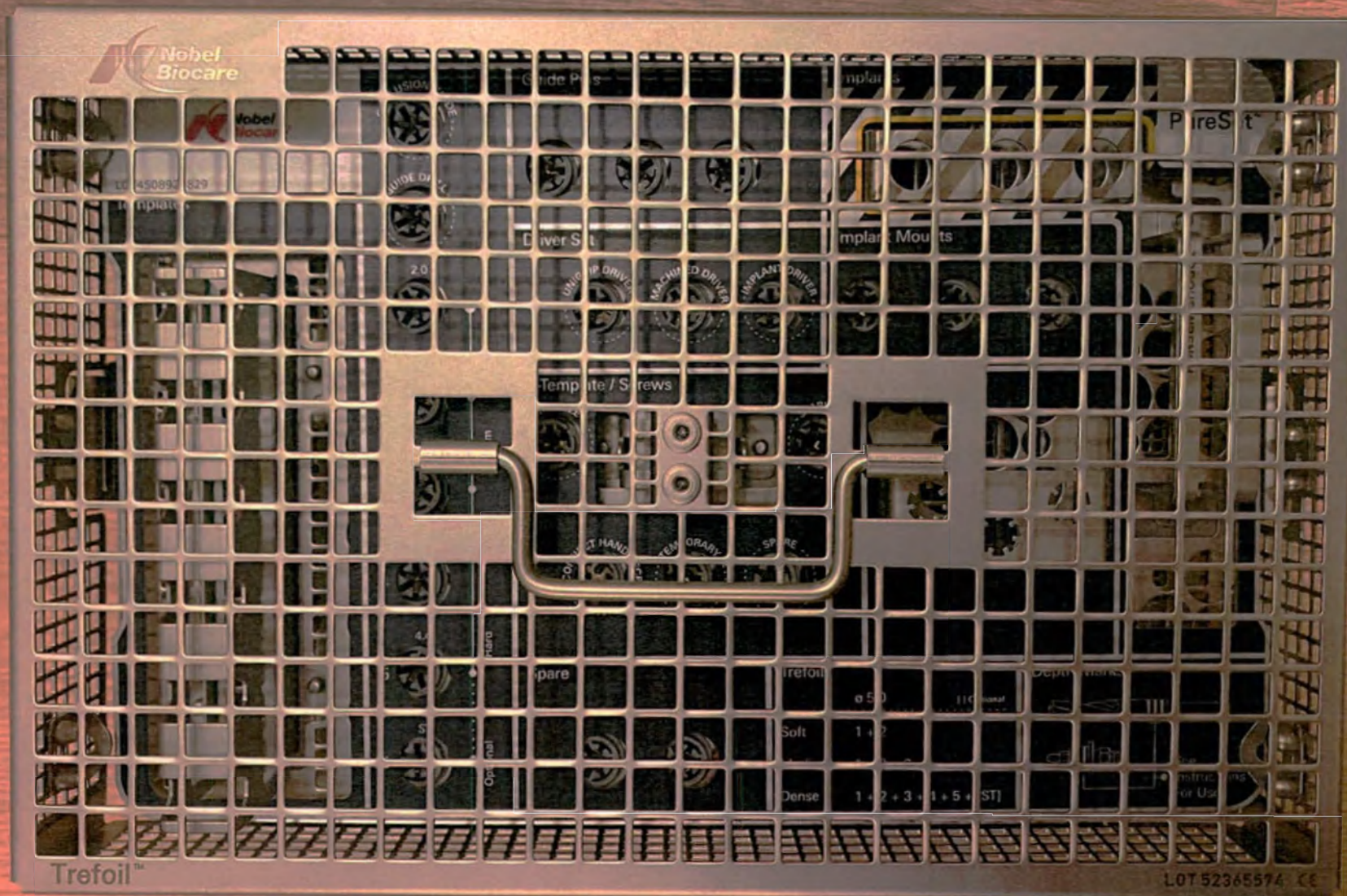

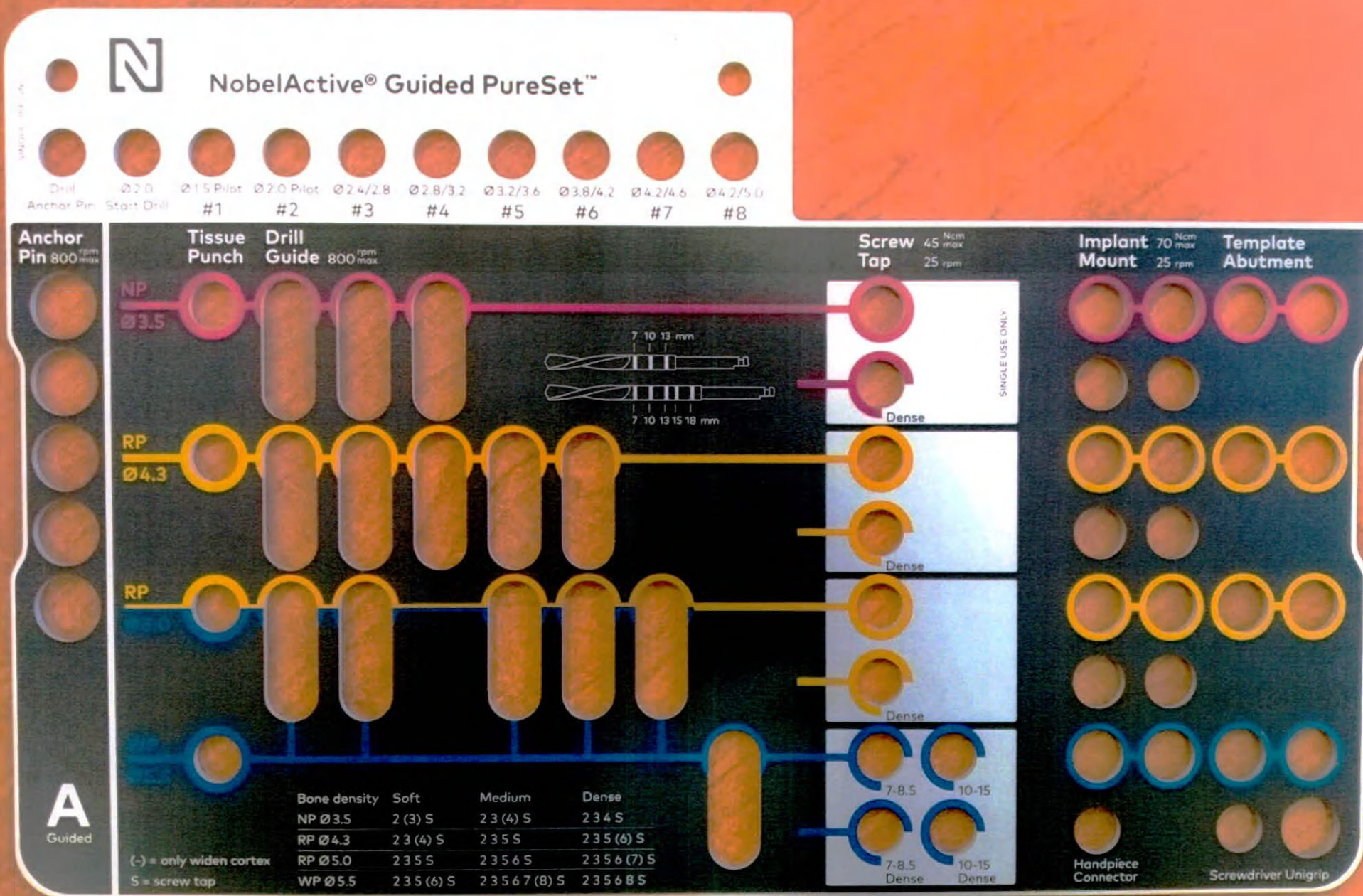


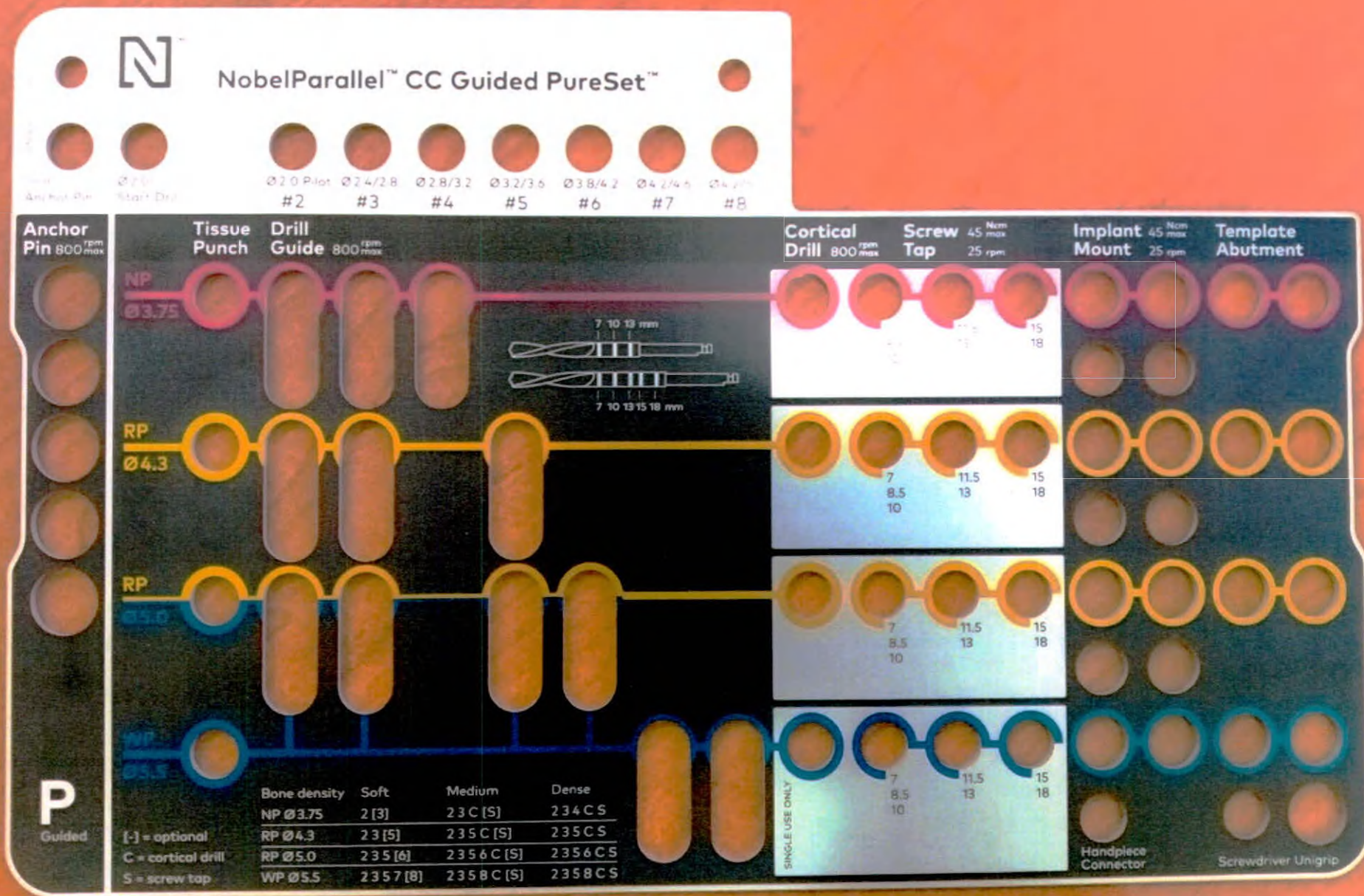

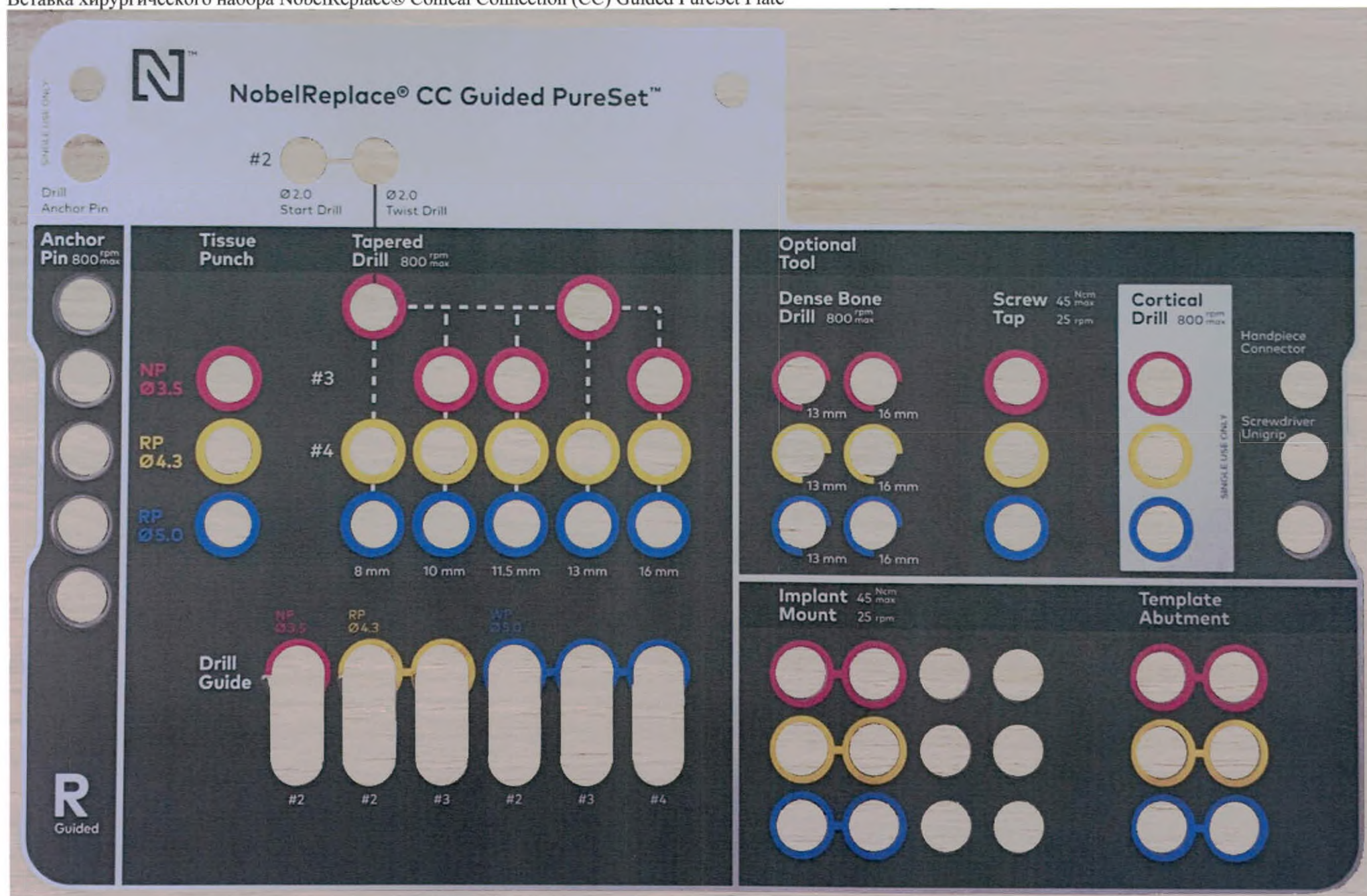

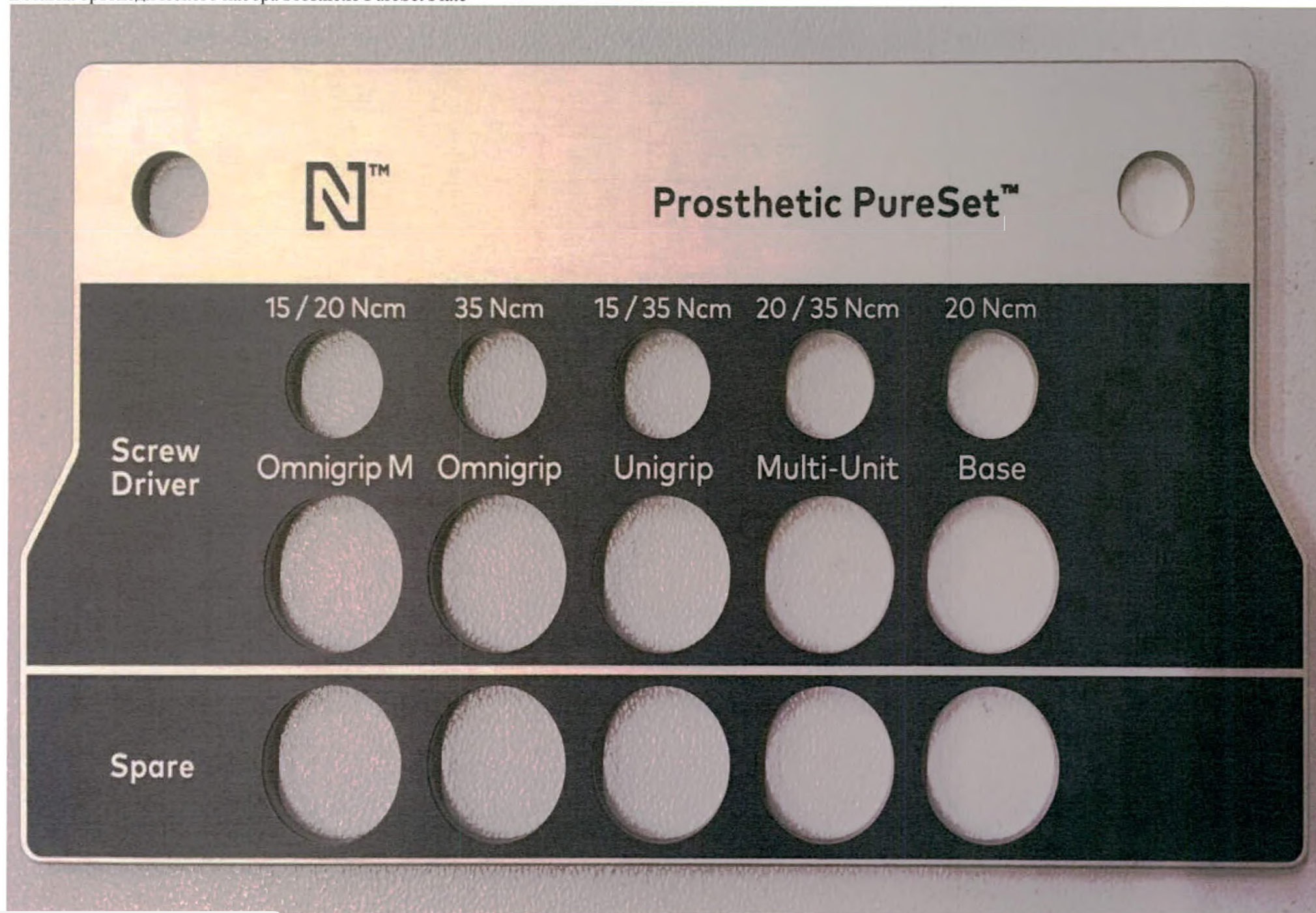

Вставка хирургического набора Nobel Biocare N1 PureSet Plate

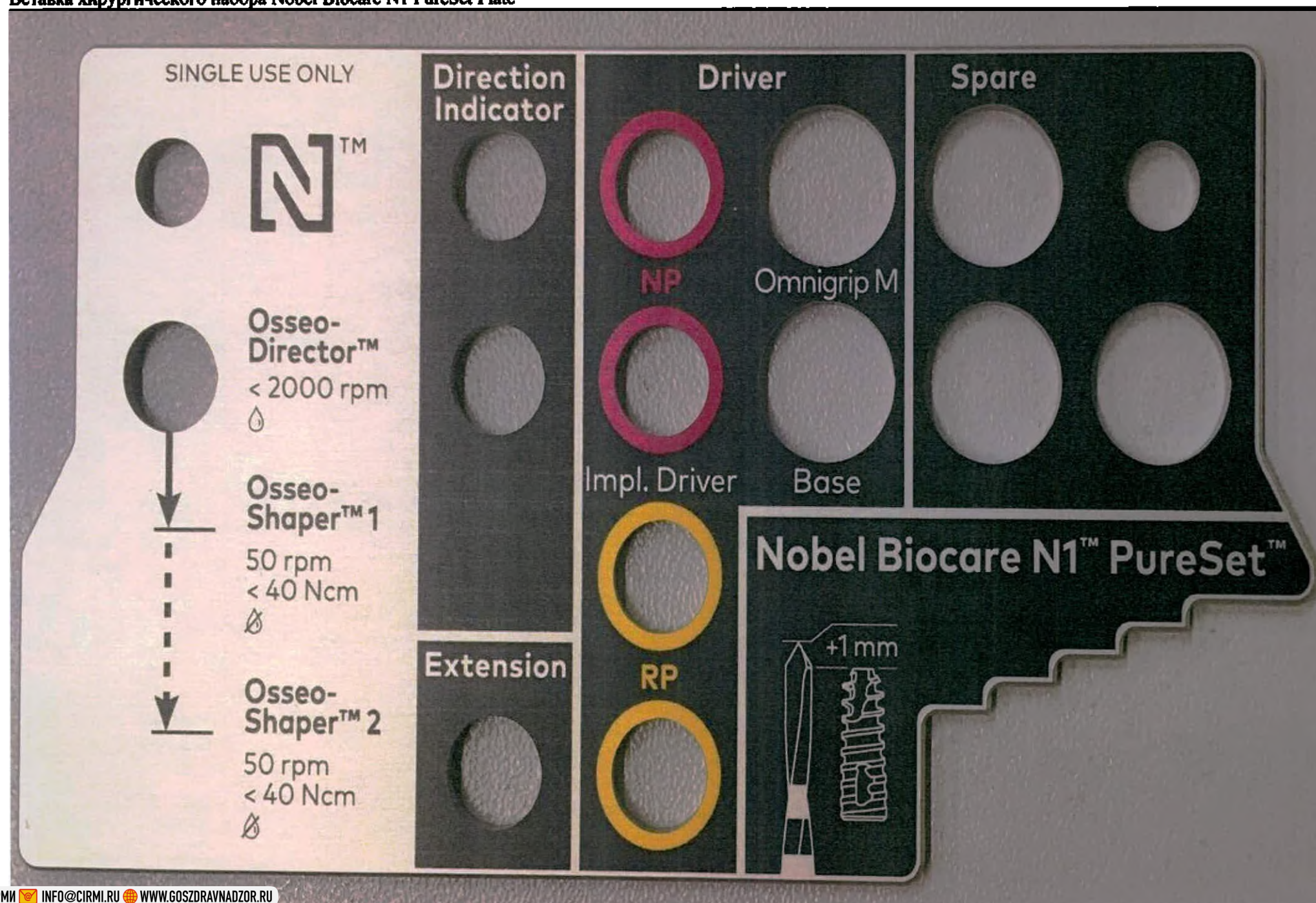

Вставка хирургического набора NobelActive®/ NobelParallel CC PureSet Plate

SINGLE USE ONLY

N[™]

#1

Precision

Ø1.5

#2

Ø2.0

Ø4.0

Guide

#3

Ø2.4/2.8

Ø4.4

Guide

#4

Ø2.8/3.2

Ø5.2

Bone Mill

#5

Ø3.2/3.6

Ø5.2

Guide

#6

Ø3.8/4.2

Ø6.2

#7

Ø4.2/4.6

Ø6.7

Guide

#8

Ø4.2/5.0

Direction Indicator

Unigrip Screwdriver

Drill Ext.

Screw Tap

Ø3.0

Ø3.5

Ø4.3

Ø5.0

7-10

11.5-15

Cortical Drill

SINGLE USE ONLY

Ø3.75

Ø4.3

Ø5.0

235

Screw Tap

SINGLE USE ONLY

Ø3.75

Ø4.3

Ø5.0

235

3.0

NP

RP

Implant Driver

PureSet[™] A/P

NobelActive[®]

	Soft	Medium	Dense
Ø3.0	1	2	23
Ø3.5	2 (3)	23 (4)	234
Ø4.3	23 (4)	235	235 (6)
Ø5.0	235	2356	2356 (7)
Ø5.5	235 (6)	23567 (8)	235685


(-) = Only widen cortex


NobelParallel[™] CC

	Soft	Medium	Dense
Ø3.75	2 (3)	23 C (5)	234 C S
Ø4.3	23 (5)	235 C (5)	235 C S
Ø5.0	235 (6)	2356 C (5)	2356 C S
Ø5.5	2357 (8)	2358 C (5)	2358 C S


(-) = Optional
C = Cortical Drill S = Screw Tap


Вставка хирургического набора NobelReplace® CC PureSet Plate

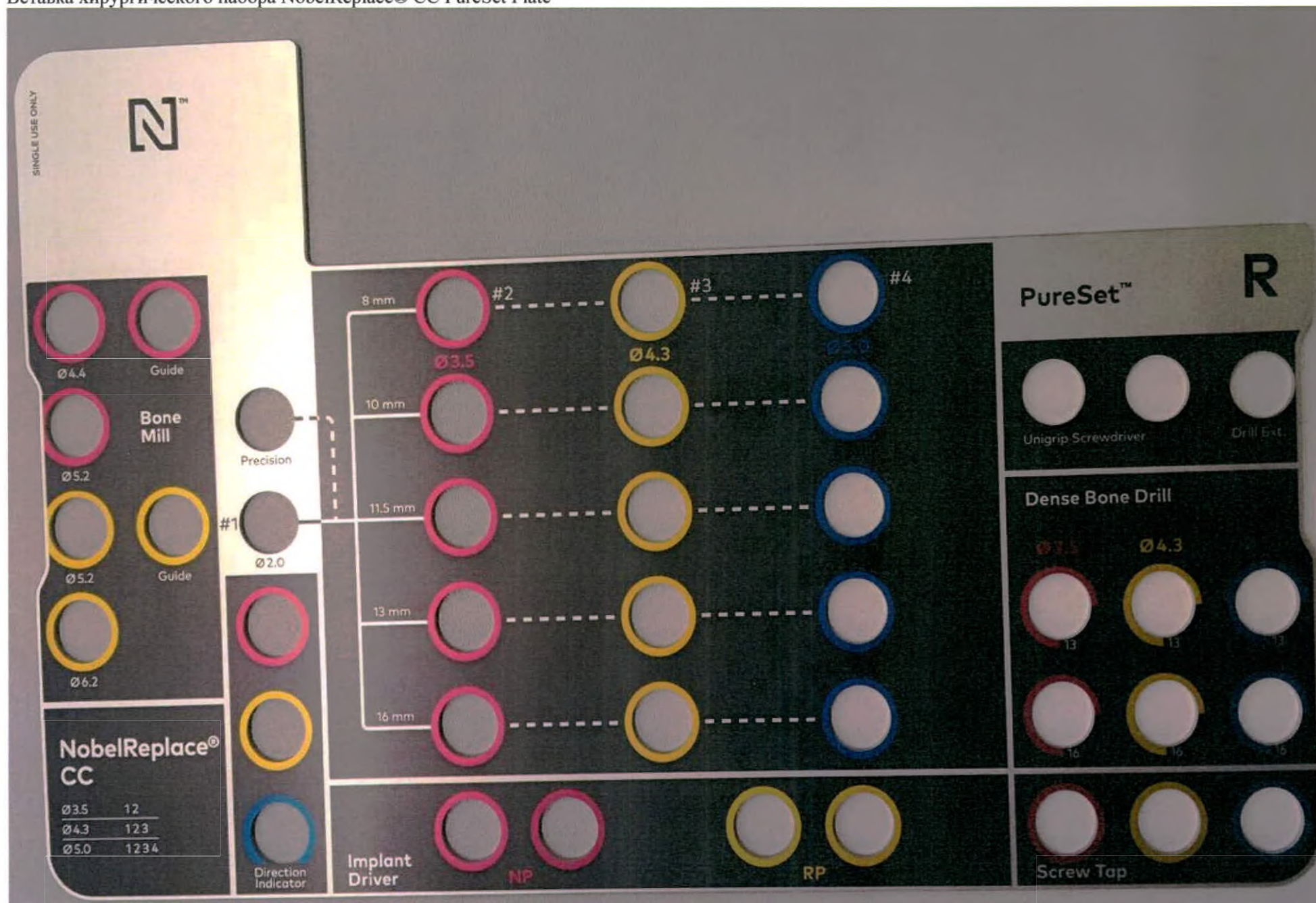

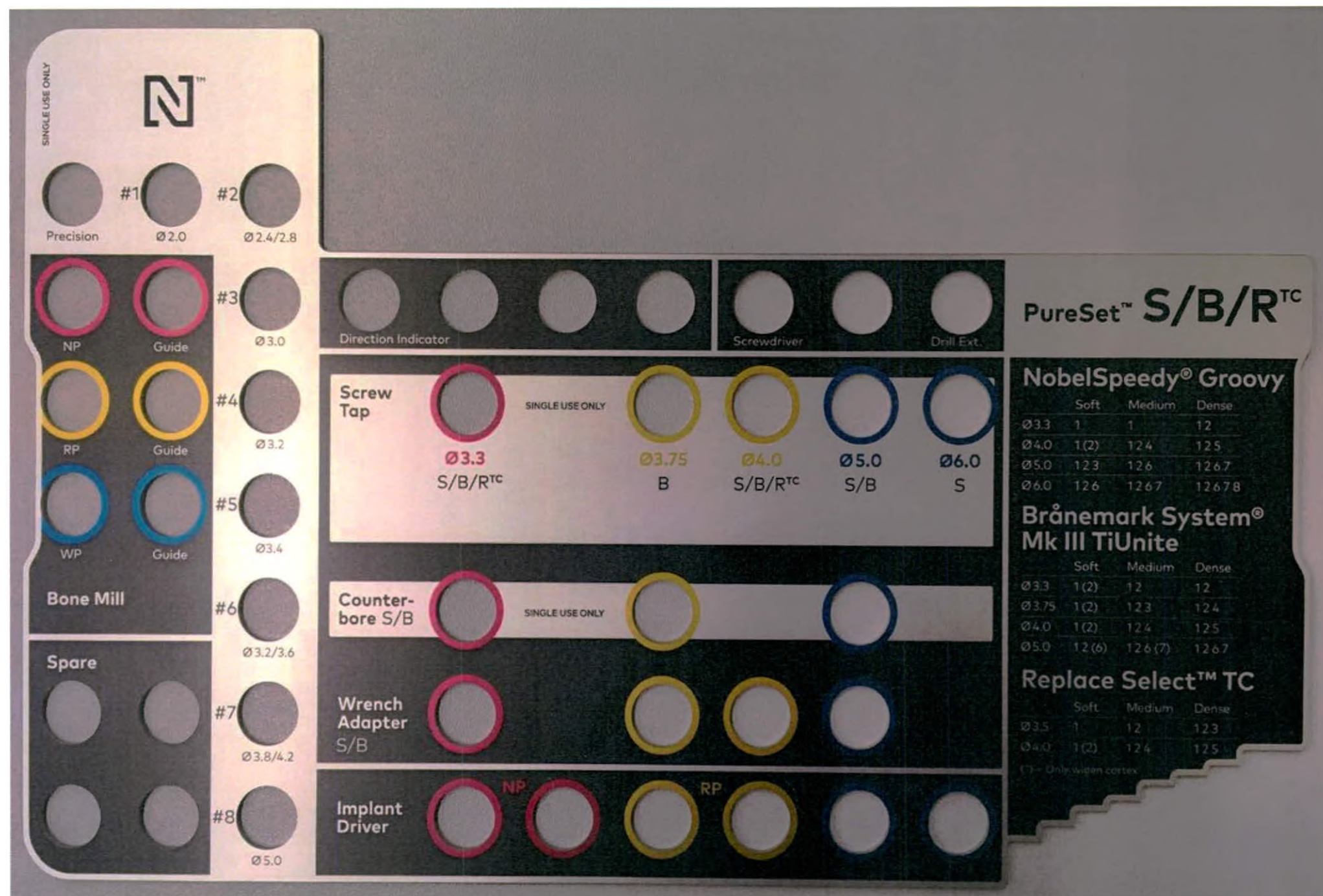


Вставка хирургического набора Trefoil PureSet Plate

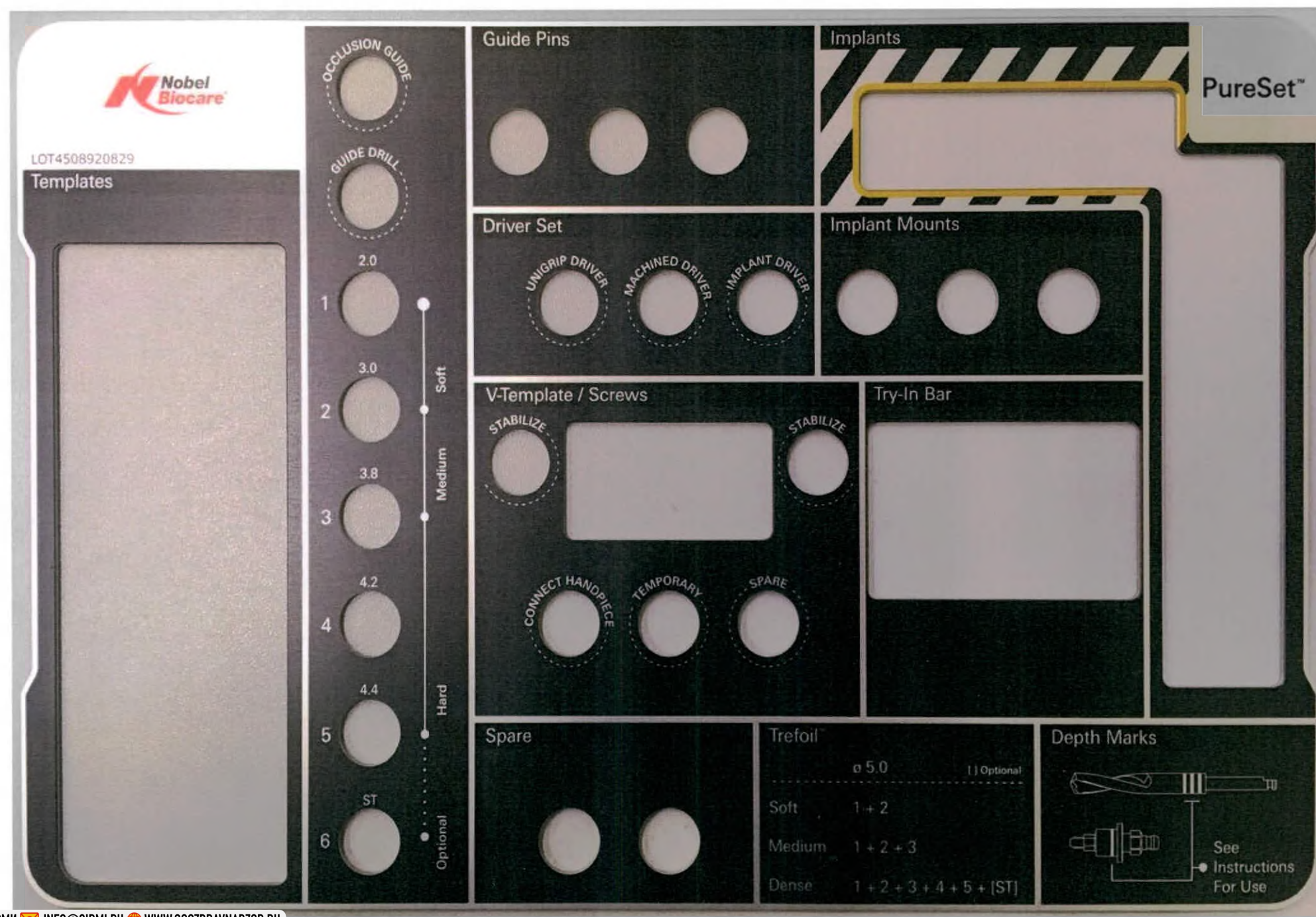


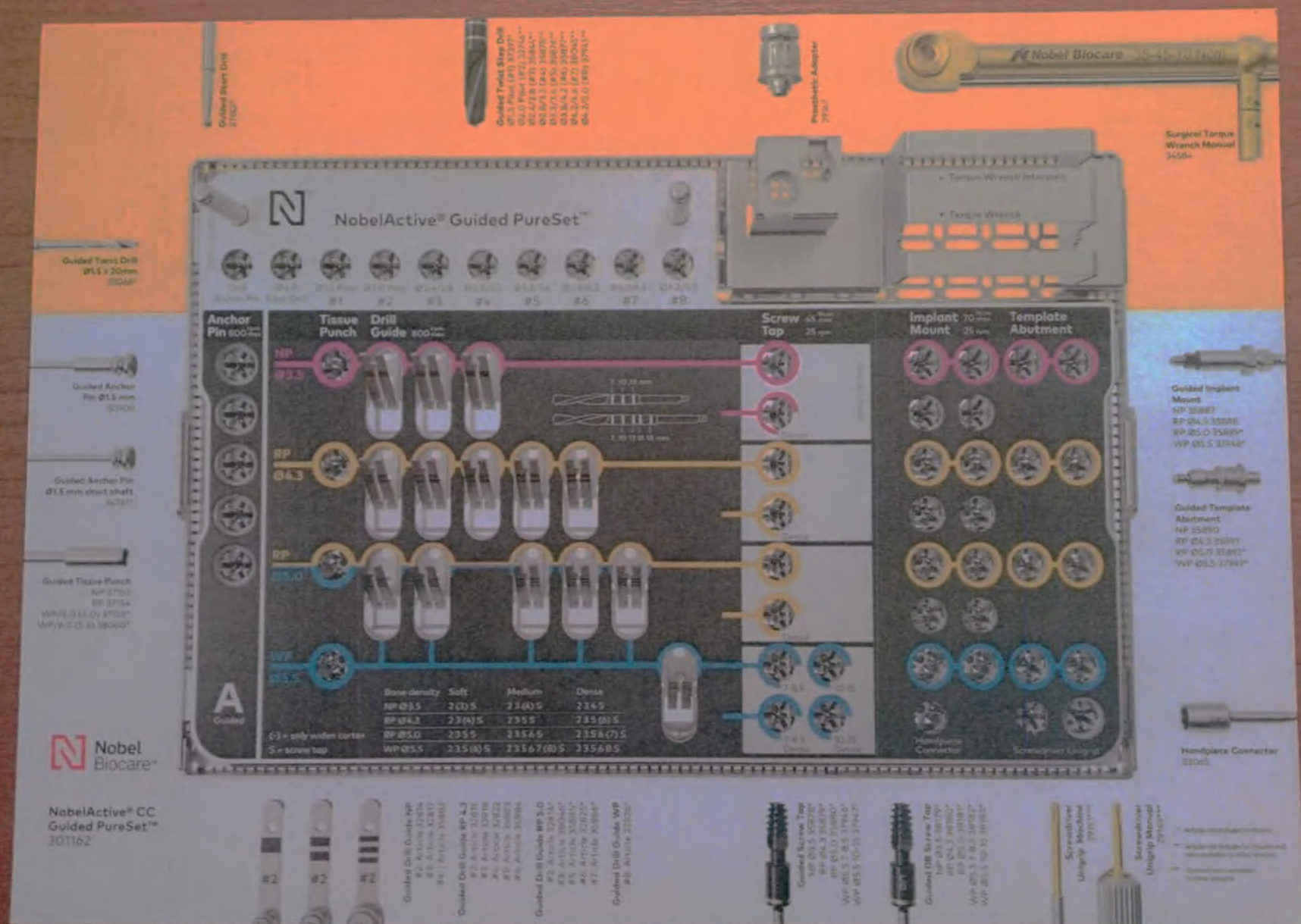



Иллюстрированная схема NobelParallel Conical Connection (CC) Guided PureSet Wall Chart

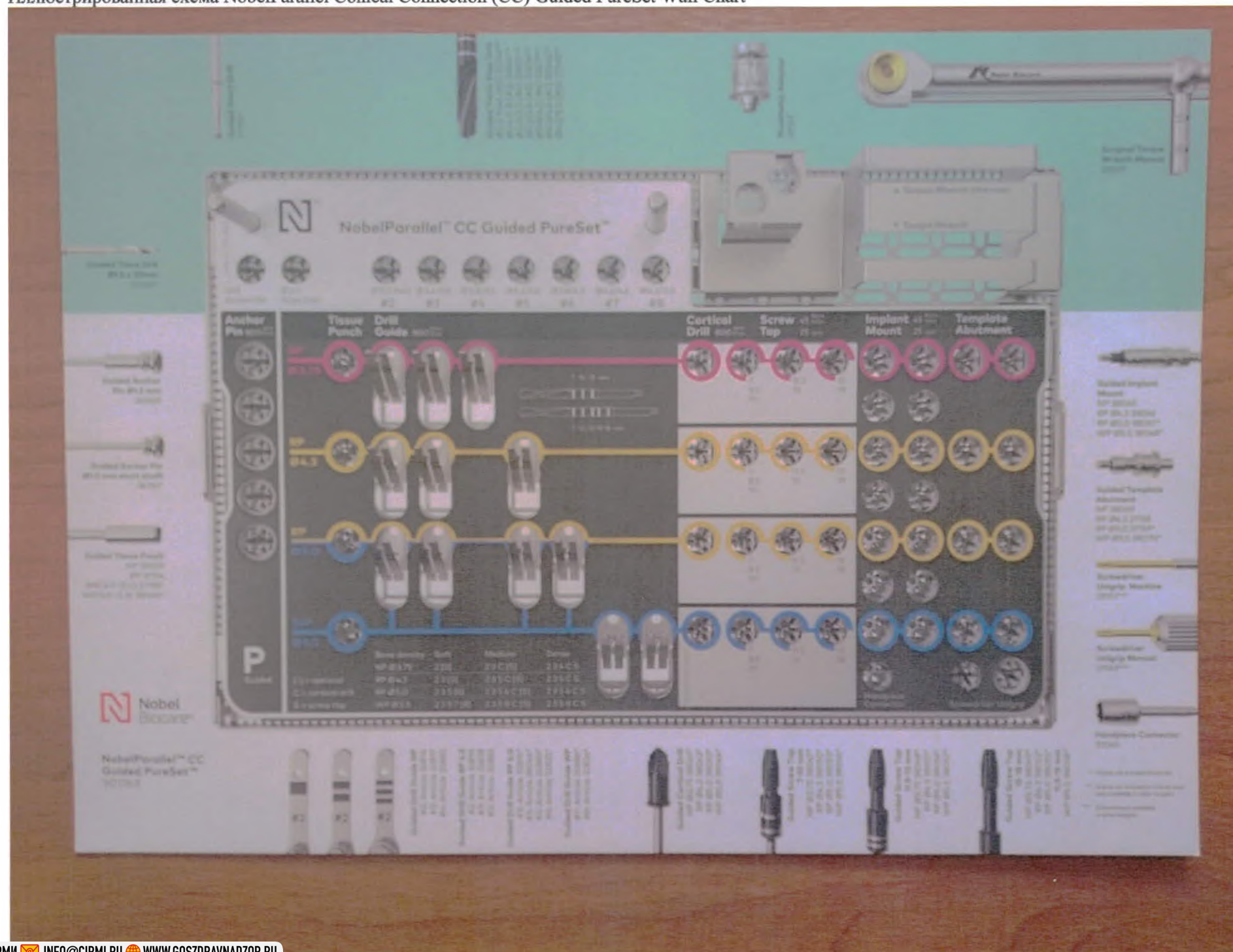


Иллюстрированная схема NobelReplace® Conical Connection (CC) Guided PureSet Wall Chart

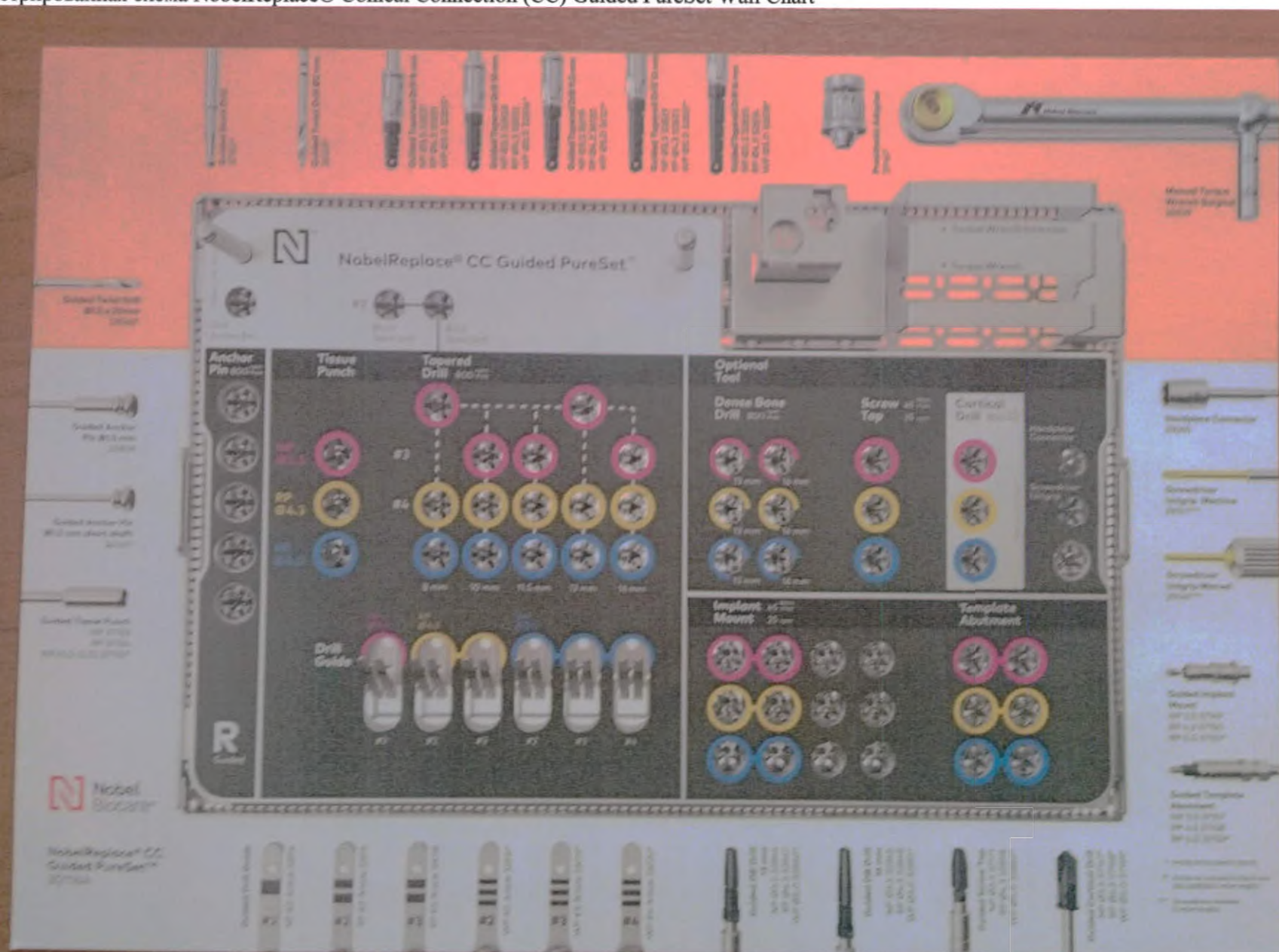

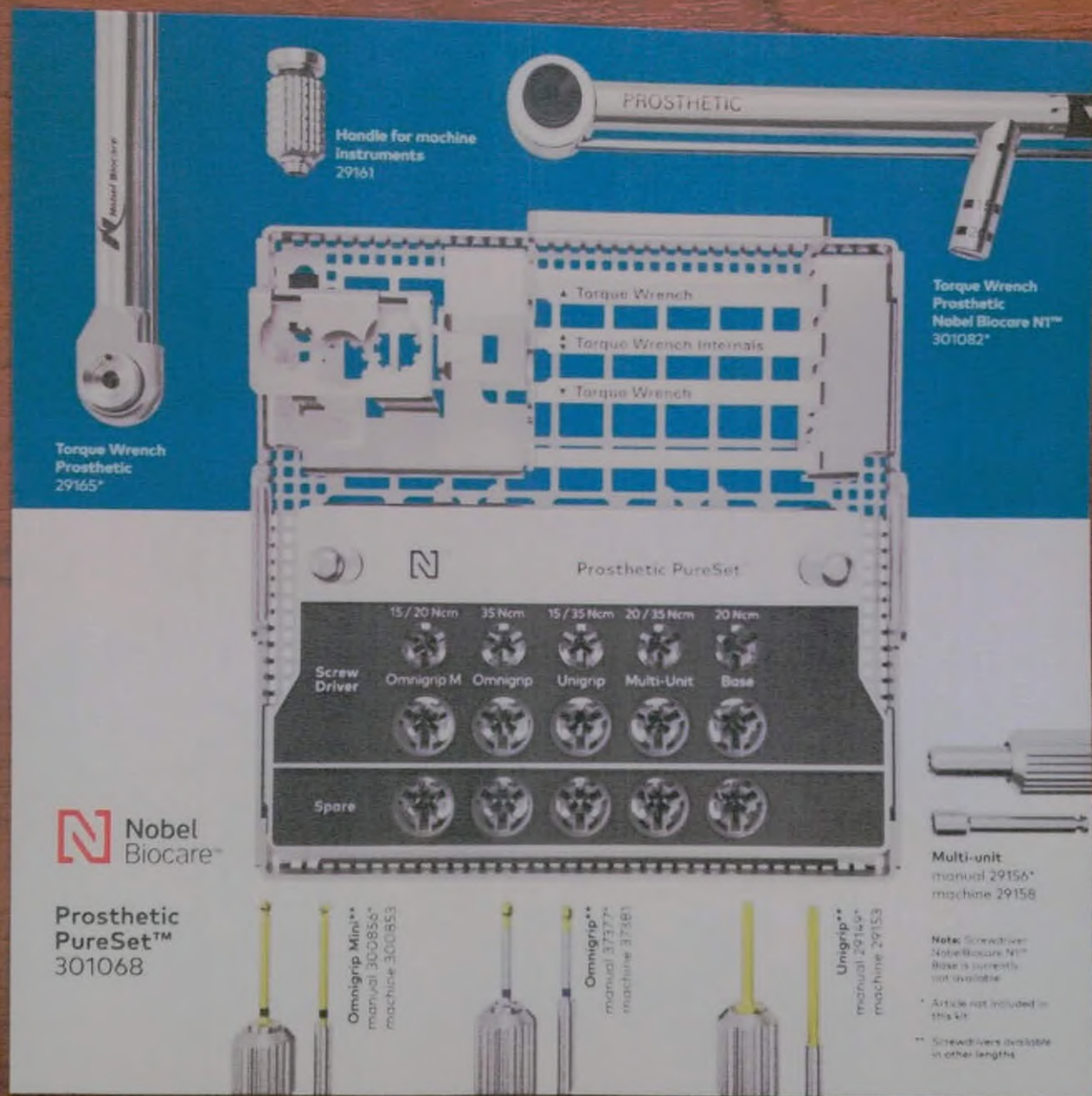

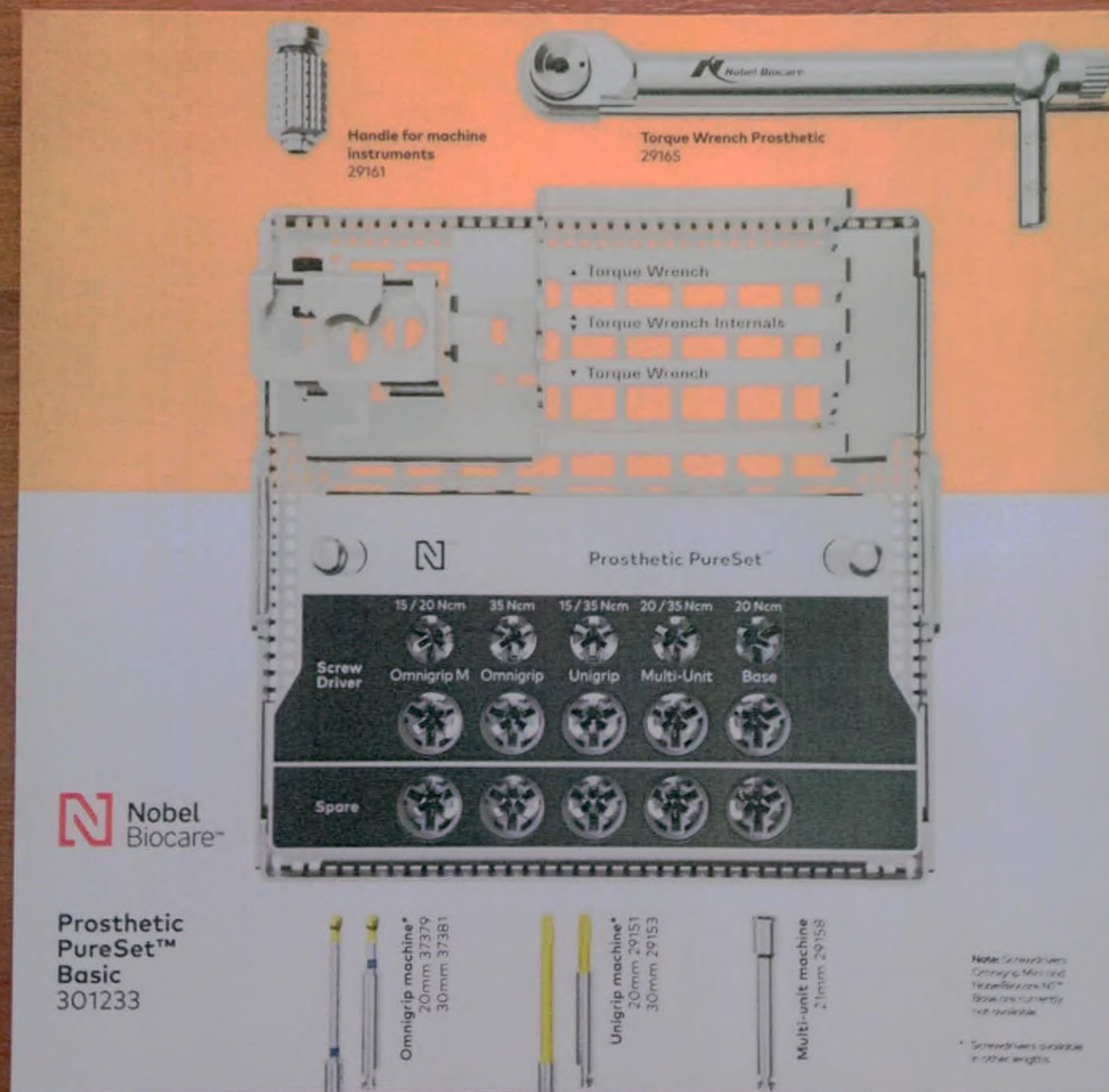

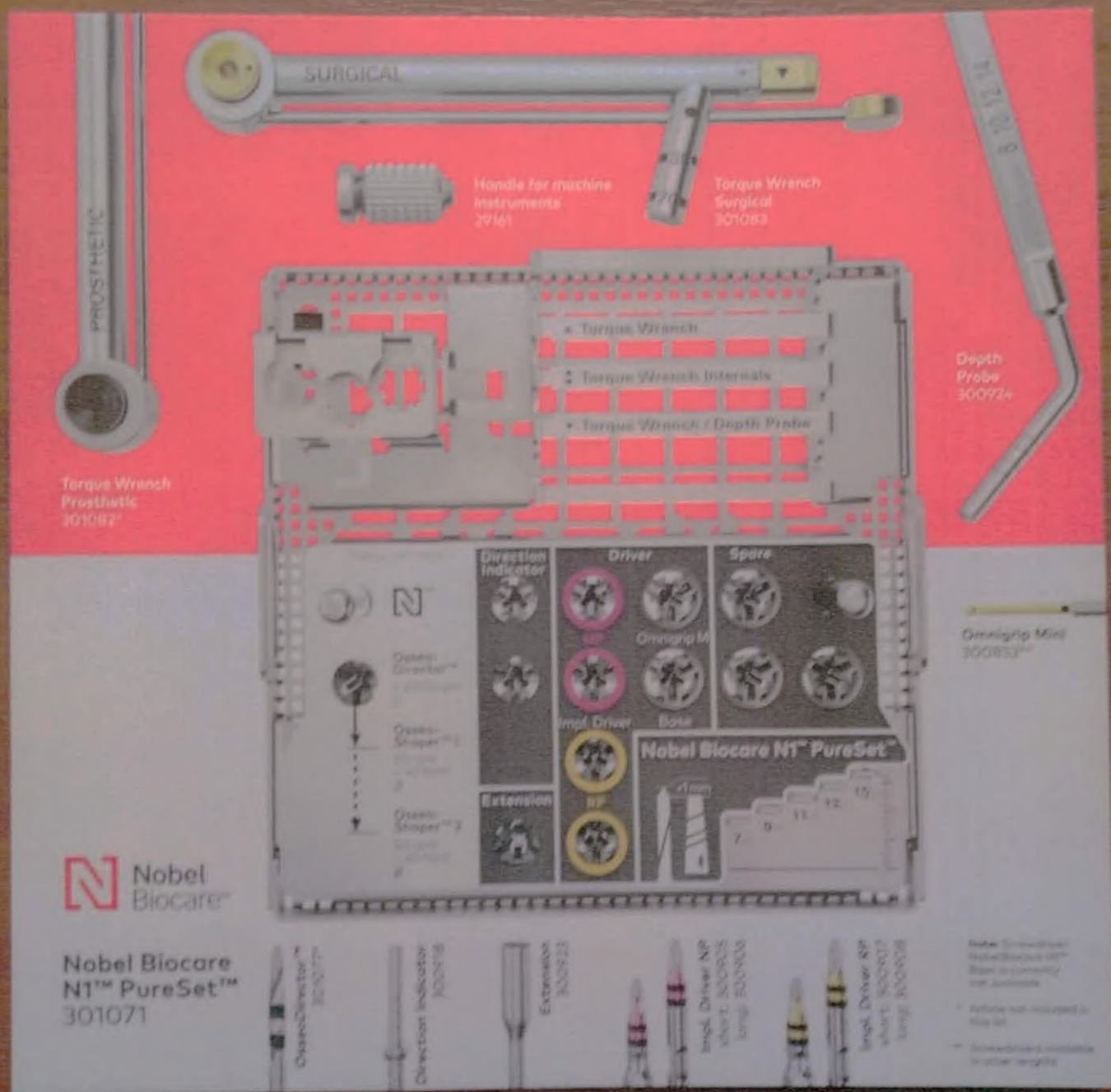

Иллюстрированная схема NobelActive/ NobelParallel CC PureSet Tray Wall Chart

Depth Probe 7-18 mm 37791

Precision Drill 35318

Bone Mill (with Guide) CC
 3.0 Ø4.0 37861^A
 NP Ø4.4 37863
 NP Ø5.2 37864
 RP Ø5.2 37866
 RP Ø6.2 37867
 WP Ø6.7 37869

Bone Mill Guide CC
 3.0 37862^A
 NP 37865
 RP 37868
 WP 37870

NobelActive®/ NobelParallel™ CC PureSet™ Tray PU0200

Direction Indicator 35313

Screwdriver manual Under 28 mm 27514P

Block Extension 35315

Surgical Driver 37792^A

NobelActive Manual Torque Wrench Surgical 34250^A

NobelImpactor Manual Torque Wrench Surgical 37850^A

PureSet™ A/P

NobelActive®

	Soft	Medium	Dense
Ø3.0	1	2	3
Ø3.5	2 (3)	2.3 (4)	2.3A
Ø4.3	2.3 (4)	2.3.5	2.3.5 (5)
Ø5.0	2.3.5	2.3.5A	2.3.5A (7)
Ø5.5	2.3.5 (6)	2.3.5A (7) (9)	2.3.5A (8.5)

(.) = Only wider cortex

NobelParallel™ CC

	Soft	Medium	Dense
Ø3.25	2 (3)	2.3C (5)	2.3A C (5)
Ø4.3	2.3 (5)	2.3.5C (5)	2.3.5C (5)
Ø5.0	2.3.5 (6)	2.3.5A C (5)	2.3.5A C (5)
Ø5.5	2.3.5 (7) (9)	2.3.5A C (5)	2.3.5A C (5)

(.) = Optional
 C = Cortical Drill S = Screw Tap

Cortical Drill

Screw Tap

Implant Driver

Twist Drills
 Ø 1.5 (7-15) 3178^A
 Ø 2.0 (7-10) 32196
 Ø 2.0 (7-15) 32197
 Ø 2.0 (10-18) 32199

Twist Step Drills
 7-10 mm
 Ø 2.4/2.8 (8.5) 32260
 Ø 2.8/3.2 (6.5) 37873
 Ø 3.2/3.5 (8.5) 32263^A
 Ø 3.8/4.3 (6.5) 32275^A
 Ø 4.2/4.6 (8.7) 37874
 Ø 4.2/5.0 (9.8) 37875

7-15 mm
 Ø 2.4/2.8 (8.3) 32261
 Ø 2.8/3.2 (6.5) 34436
 Ø 3.2/3.5 (8.5) 32264
 Ø 3.8/4.3 (6.5) 32276
 Ø 4.2/4.6 (8.7) 37872
 Ø 4.2/5.0 (9.8) 37876

10-18 mm
 Ø 2.4/2.8 (8.3) 32262
 Ø 2.8/3.2 (6.5) 34439
 Ø 3.2/3.5 (8.5) 32265
 Ø 3.8/4.3 (6.5) 32277
 Ø 4.2/4.6 (8.7) 34583

Implant Driver 3.0
 28 mm 36773^A
 37 mm 36774^A

Implant Driver NP
 28 mm 36718
 37 mm 36719

Implant Driver RP
 28 mm 36720
 37 mm 36721

Implant Driver WP
 28 mm 37859
 37 mm 37860


Screw Tap^A
 3.0 36816
 NP 3.5 36236
 RP 4.3 36237
 RP 5.0 36238
 WP 5.5 (7-10) 37871
 WP 5.5 (13.5-15) 37872

Cortical Drill^P
 NP 3.75 38000
 RP 4.3 38001
 RP 5.0 38002
 WP 5.5 38003

Screw Tap^P
 NP 3.75 (7-13) 37990
 NP 3.75 (7-18) 37991
 RP 4.3 (7-13) 37992
 RP 4.3 (7-18) 37993
 RP 5.0 (7-13) 37994
 RP 5.0 (7-18) 37995
 WP 5.5 (7-10) 37996
 WP 5.5 (7-15) 37997

*** Available in other lengths**
^A Specific to NobelActive
^P Specific to NobelParallel

Иллюстрированная схема NobelReplace CC PureSet Wall Chart

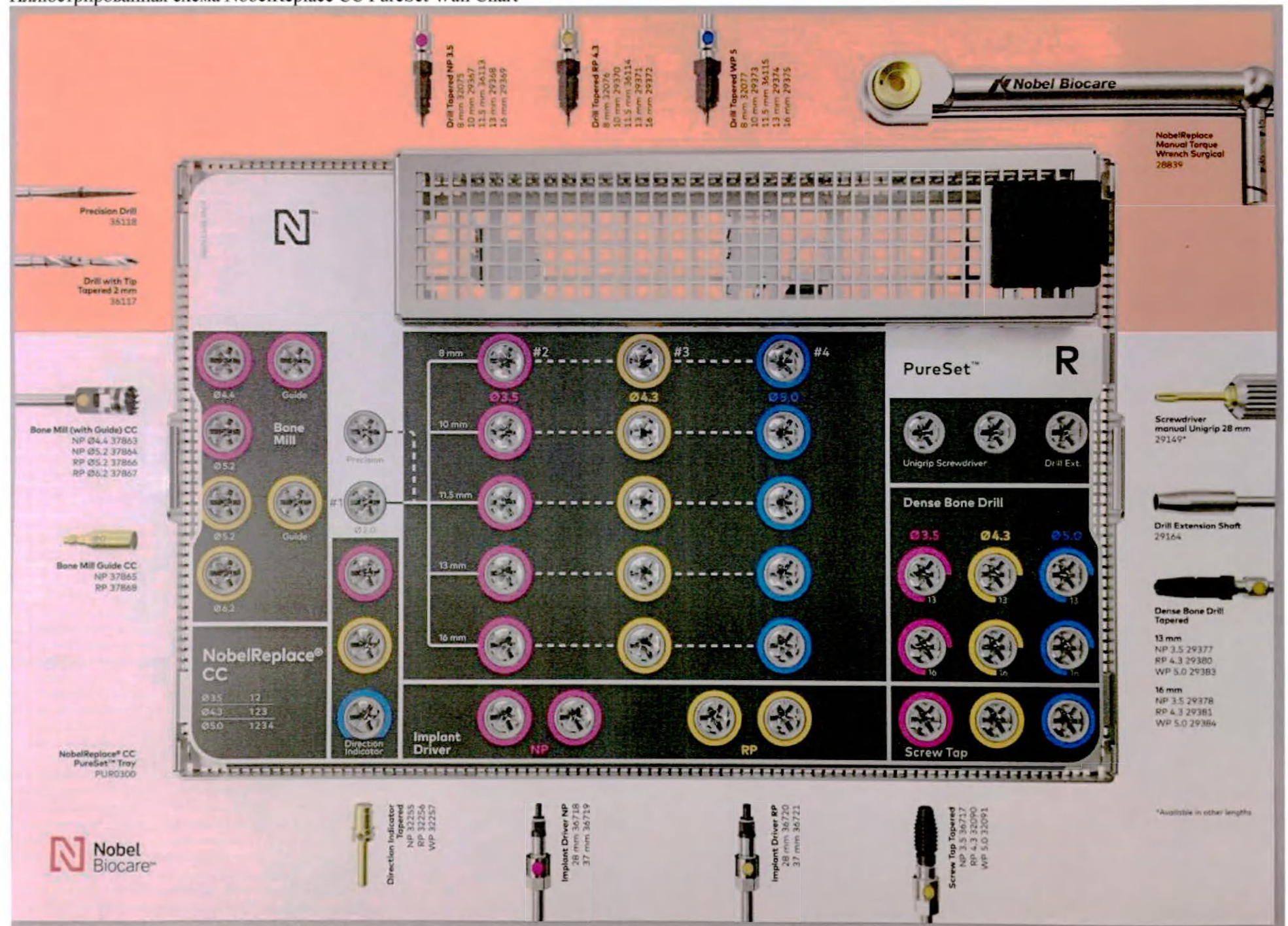

Иллюстрированная схема NobelSpeedy® Groovy / Brånemark System® PureSet Wall Chart

Depth Probe 7-18 mm Z-shaped 37791

NobelSpeedy Depth Probe 18-25mm 37692³

Precision Drill 36118

Bone Mill (with Guide) Brk Syst
NP Ø4.5 33392
RP Ø5.1 33393
WP Ø6.5 33495

Bone Mill Guide Brk Syst
NP 33496
RP 33497
WP 33498

NobelSpeedy/Brånemark Syst/Replace Sel TC PureSet™ Tray PURO900

Direction Indicator Ø2/Ø2.4-2.8mm 32112

Screwdriver manual Unipro 28 mm 29242²

Cover Screw Driver Brk Syst Hexagon DIB Ø97.0

Drill Extension Shaft 29164

Brånemark System® Manual Torque Wrench Surgical 32110

Brånemark System® Counterbore NP 32281 RP 32283 WP 32285

Screw Top NP Ø3.3 7-15mm 32627 RP Ø3.75 7-13mm 32290³ RP Ø3.75 7-18mm 32291³ RP Ø4 7-13mm 33072 RP Ø4 7-18mm 33073 WP Ø5 7-13mm 32292 WP Ø5 7-18mm 32293 WP Ø6 7-13mm 32294³ WP Ø6 7-18mm 32295³

Brånemark System® Mk III TiUnite

	Soft	Medium	Dense
Ø3.3	1(2)	12	12
Ø3.75	1(2)	123	124
Ø4.0	1(2)	124	125
Ø5.0	12(6)	126(7)	1267

Replace Select™ TC

	Soft	Medium	Dense
Ø3.5	1	12	123
Ø4.0	1(2)	124	125

(-) = Only widen cortex

Brånemark System® PureSet™ S/B/R^{TC}

NobelSpeedy® Groovy

	Soft	Medium	Dense
Ø3.3	1	1	12
Ø4.0	1(2)	124	125
Ø5.0	123	126	1267
Ø6.0	126	1267	12678

Brånemark System® Mk III TiUnite

	Soft	Medium	Dense
Ø3.3	1(2)	12	12
Ø3.75	1(2)	123	124
Ø4.0	1(2)	124	125
Ø5.0	12(6)	126(7)	1267

Replace Select™ TC

	Soft	Medium	Dense
Ø3.5	1	12	123
Ø4.0	1(2)	124	125

(-) = Only widen cortex

Drill 7-10 mm

Ø 2 (#1) 32297

Ø 2.4/2.8 (#2) 32260

Ø 3 (#3) 32266

Ø 3.2 (#4) 32269

Ø 3.4 (#5) 32272

Ø 3.2/3.6 (#6) 32263

Ø 3.6/4.2 (#7) 32275

Ø 5 (#8) 32278³

7-15 mm

Ø 2 (#1) 32297

Ø 2.4/2.8 (#2) 32261

Ø 3 (#3) 32267

Ø 3.2 (#4) 32270

Ø 3.4 (#5) 32273

Ø 3.2/3.6 (#6) 32264

Ø 3.6/4.2 (#7) 32276

Ø 5 (#8) 32279³

10-18 mm

Ø 2 (#1) 32299

Ø 2.4/2.8 (#2) 32262

Ø 3 (#3) 32268

Ø 3.2 (#4) 32271

Ø 3.4 (#5) 32274

Ø 3.2/3.6 (#6) 32265

Ø 3.6/4.2 (#7) 32277

Ø 5 (#8) 32280³

18-35 mm

Ø 2.0 (#1) 37614³

Ø 2.15 (#1.5) 37616³

Ø 2.4/2.8 (#2) 37618³

Ø 2.4/2.8 L5 (#2) 37620³

Ø 3.2 (#4) 37616³

Ø 3.4 (#5) 37617³

Implant Driver Brk Syst
NP 26 mm 29126
RP 34 mm 29127
RP 21 mm 29129
RP 26 mm 29130
RP 34 mm 29131
WP 21 mm 29134
WP 26 mm 29135

Implant Driver Wrench
Adap Brk Syst
NP 21mm 29128
RP 12mm 29132
RP 21mm 29133
WP 12mm 29136

Иллюстрированная схема Replace Select TC PureSet Wall Chart

Depth Probe 7-18 mm Z-shaped 37791

Direction Indicator Ø2/Ø2.4-2.8mm 32112

Screwdriver manual Unigrip 28 mm 29149

Drill Extension Shaft 29164

NobelReplace Mon Torque Wrench Surgical 28839

Precision Drill 36118

Bone Mill with Guide NobRpl NP Ø4.6 36830 RP Ø5.3 36831

NobelSpeedy/Brånemark Syst/Replace Sel TC PureSet™ Tray PU0900

- #1 Precision Ø2.0
- #2 Ø2.4/2.8
- #3 NP Guide Ø3.0
- #4 RP Guide Ø3.2
- #5 WP Guide Ø3.4
- #6 Bone Mill Ø3.2/3.6
- #7 Spare Ø3.8/4.2
- #8 Spare Ø5.0

Direction Indicator Screwdriver Drill Ext.

Screw Top

Ø3.3 S/B/R^{TC} Ø3.75 B Ø4.0 S/B/R^{TC} Ø5.0 S/B Ø6.0 S

Counter-bore S/B

Wrench Adapter S/B

Implant Driver NP RP WP

PureSet™ S/B/R^{TC}

NobelSpeedy® Groovy

	Soft	Medium	Dense
Ø3.3	1	1	12
Ø4.0	1(2)	124	125
Ø5.0	123	126	1267
Ø6.0	126	1267	12678

Brånemark System® Mk III TiUnit

	Soft	Medium	Dense
Ø3.3	1(2)	12	12
Ø3.75	1(2)	123	124
Ø4.0	1(2)	124	125
Ø5.0	12(6)	126(7)	1267

Replace Select™ TC

	Soft	Medium	Dense
Ø3.5	1	12	123
Ø4.0	1(2)	124	125

(-) = Only within cortex

Screw Top NP Ø3.3 7-15mm 37627 RP Ø4 7-13mm 33072 RP Ø4 7-18mm 33073


*Available in other lengths

Drill

- 7-10 mm
 - Ø2 (#1) 32296
 - Ø2.4/2.8 (#2) 32260
 - Ø3 (#3) 32266
 - Ø3.2 (#4) 32269
 - Ø3.4 (#5) 32272
- 7-15 mm
 - Ø2 (#1) 32297
 - Ø2.4/2.8 (#2) 32261
 - Ø3 (#3) 32267
 - Ø3.2 (#4) 32270
 - Ø3.4 (#5) 32273
- 10-18 mm
 - Ø2 (#1) 32299
 - Ø2.4/2.8 (#2) 32262
 - Ø3 (#3) 32268
 - Ø3.2 (#4) 32271
 - Ø3.4 (#5) 32274

Implant Driver NobRpl NP Short 36124 NP Long 36125 RP Short 36126 RP Long 36127

Иллюстрированная схема Wall Chart Trefoil PureSet.

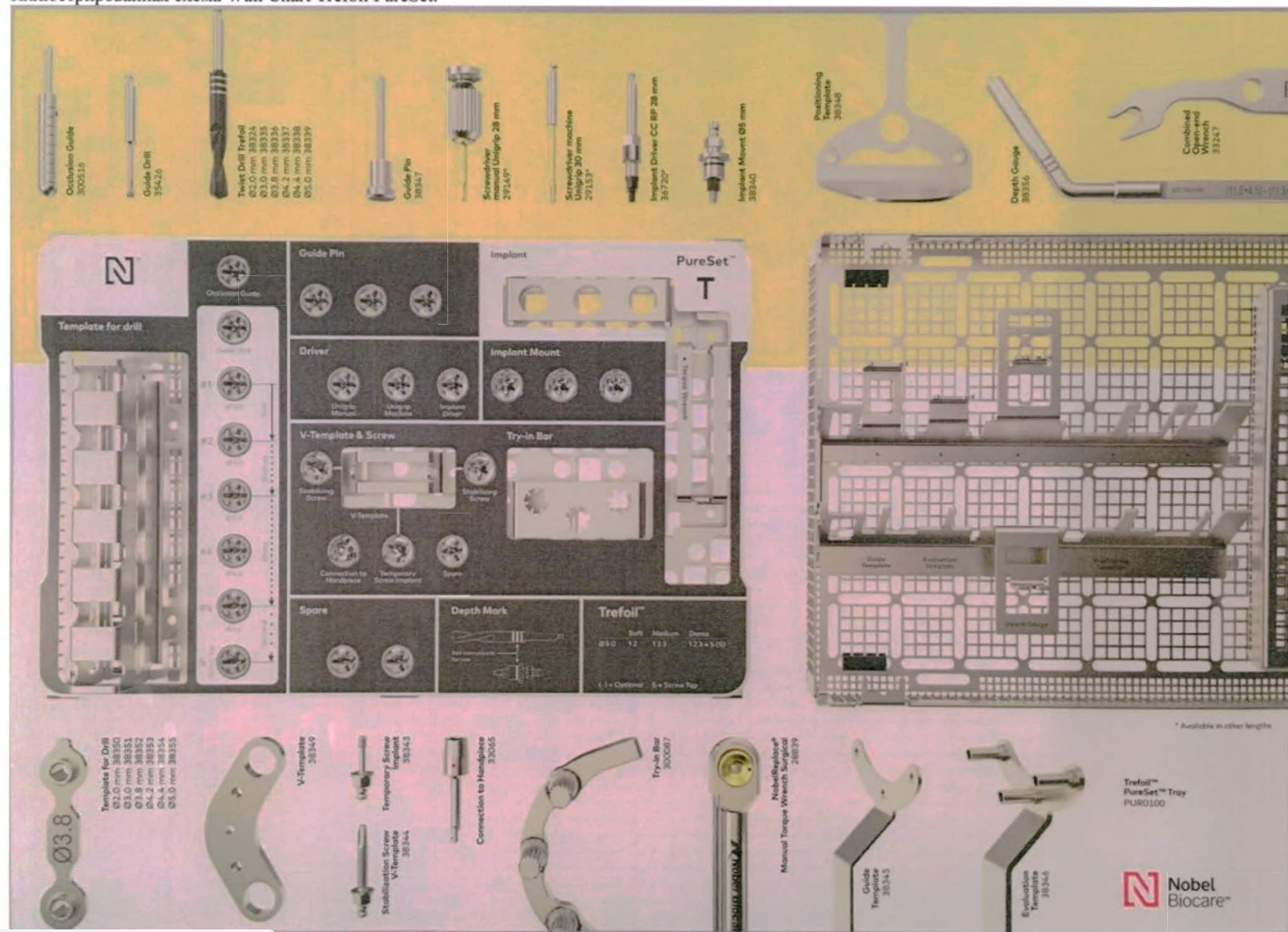

Образец упаковки (картонной коробки) лотков стоматологических на примере изделия лоток стоматологический для хирургического набора NobelSpeedy/Brånemark Syst/Replace Sel TC PureSet Tray.



Образец упаковки (картонной коробки) лотков стоматологических на примере изделия лоток стоматологический для хирургического набора Nobel Biocare N1 PureSet Tray





symbol glossary.nobelbiocare.com
ifu.nobelbiocare.com

QTY 1 Made in Germany




CH REP

Nobel Biocare Services AG
Balz Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten, Switzerland



Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26, Vastra Hamngatan 1 411 17 Goteborg, Sweden

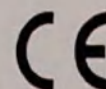

nobelbiocare.com/trademark-info

Covered by US or international patents listed at nobelbiocare.com Distributed in USA by Nobel Biocare USA, LLC, Yorba Linda, CA, USA

en Dental sterilization tray **bg** Дентална табла за стерилизация **cs** Zubní sterilizační podnos **da** Dental steriliseringsbakke
de Dental-Sterilisationsfach **el** Οδοντικός δίσκος αποστείρωσης **es** Bandeja de esterilización dental **et** Stomatoloogiline steriliseerimiskandik
fi Sterilointiasia **fr** Plateau de stérilisation dentaire **hr** Zubna sterilizacijska plitica **hu** Fogászati sterilizálótálca **it** Vassoio di sterilizzazione dentale
lt Dantų sterilizavimo dėklas **lv** Sterilizēšanas paplāte lietošanai zobārstniecībā **nl** Dentale sterilisatielade **no** Dental steriliseringskurv
pl Stomatologiczna kaseta do sterylizacji **pt** Tabuleiro de esterilização dentário **ro** Tavă de sterilizare dentară **ru** Дентальный лоток для стерилизации
sk Zubná sterilizačná tácka **sl** Zobni sterilizacijski pladenj **sr** Dentalna Posuda za sterilizaciju **sv** Dental steriliseringsbricka
tr Dental Sterilizasyon Tablası



2022-08-29



(01)07332747149982
(10)52773516
(11)220829



PUR0300



52773516

NobelReplace® CC
PureSet Tray



410724_03

Образец маркировки упаковки (картонной коробки) лотков стоматологических на примере изделия лоток стоматологический для хирургического набора Trefoil PureSet Tray.

REF PUR0100

LOT 52365574

Qty.: 1

Trefoil™ PureSet Tray



Consult Instructions
for Use



Rx only




Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 28
Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Sweden

Distributed in North and South America by
Nobel Biocare USA, LLC, Yorba Linda, CA, USA

(01)07332747149988(10)52365574

Made in Germany

Образец упаковки и маркировки упаковки вставок на примере вставки хирургического набора Trefoil PureSet Plate

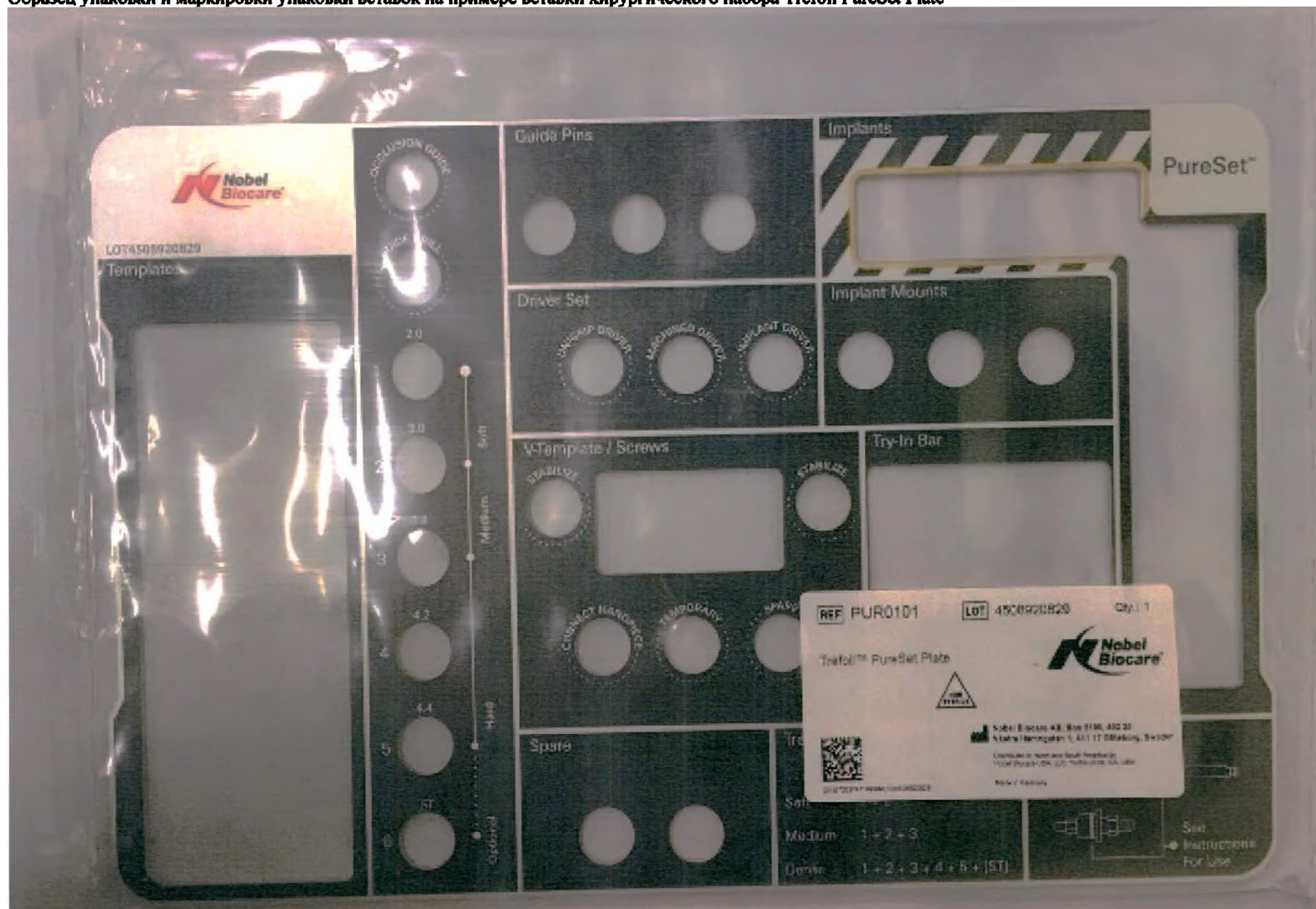

Пример маркировки изделия на русском языке

Артикул: _____ Лот: _____

Лоток стоматологический для хирургического набора NobelActive® Guided PureSet Tray

Производитель: «Нобель Байокер АБ», Швеция, Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26, Västra Hamngatan 1, Göteborg 411 17, Sweden.

Место производства (изготовлено в): см. на упаковке

Регистрационное удостоверение: № РЗН ____/____ от ____/____/____

Лотки стоматологические с принадлежностями

Уполномоченный представитель, продавец: ООО «Нобель Биокер Раша», 109004 Москва, ул. Станиславского, дом 21, стр. 2. Тел +7 (495) 974-77-55.

Символы: см. на упаковке

Дата изготовления: см. на упаковке

NobelActive® Guided
PureSet Tray

REF PUR0600

LOT 52528024



(01)07332747189034(10)52528024



symbol glossary nobelbiocare.com
ifu nobelbiocare.com

nobelbiocare.com/trademark-info



Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 28 Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Sweden

Distributed in North and South America by Nobel Biocare USA, LLC, Yorba Linda, CA, USA

Made in Germany

N



QTY: 1













Лоток стоматологический для хирургического набора Nobel Biocare N1 PureSet Tray;



2022-01-10



01007032747107104
10052729170
111220110

QTY: 1 Made in Germany



CH REP

Nobel Biocare Services AG
3400 Zimmermann-Strasse 7
4102 Kloten, Switzerland



Nobel Biocare AB, Box 5700, K22 20, S-402 22 Göteborg, Sweden

Information: info@nbi.com

Distributed by US & international agents: nbi.com Distributed in USA by Nobel Biocare USA, LLC, Yorba Linda, CA, USA

en Dental Sterilizationsbox by Dentana, jedna iz preparacija za zobni sterilizacijski proces. da Dental sterilizacijski proces.
de Dental Sterilisationsbox el Còmputatòr de control de la temperatura de la cámara de esterilización dental el Almacenamiento de los instrumentos.
fr Sterilisation à l'oxygène de la chambre de la Dentana, une procédure de stérilisation dentaire et d'hygiène dentaire.
it Dental sterilization box by Dentana, una procedura di sterilizzazione dentale e di igiene dentale.
es Dental sterilization box by Dentana, una procedura de esterilización dental e de higiene dental.
pt Dental sterilization box by Dentana, uma procedimento de esterilização dental e de higiene dental.
ru Dental Sterilization box by Dentana, одна из процедур стерилизации зубов и гигиены полости рта.
uk Dental Sterilization box by Dentana, одна з процедур стерилизації зубів та гігієни порожнини рота.
tr Dental Sterilization box by Dentana, bir tıbbi alet sterilizasyonu ve hijyeni için kullanılır.



REF

PURCHASE

LOT

52729170

Nobel Biocare N1
PureSil Tray



Made in Germany

Пример маркировки на русском языке. Данная маркировка наносится на вторичную упаковку.

Артикул: _____ Лот: _____

Вставка хирургического набора NobelActive® Guided PureSet Plate Производитель:
«Нобель Байокер АБ», Швеция, Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26, Västra Hamngatan 1,
Göteborg 411 17, Sweden.

Место производства (изготовлено в): см. на упаковке

Регистрационное удостоверение: № РЗН ____/____ от ____/____/____


Лотки стоматологические с принадлежностями

Уполномоченный представитель, продавец: ООО «Нобель Биокер Раша», 109004 Москва, ул.
Станиславского, дом 21, стр. 2. Тел +7 (495) 974-77-55.


Символы: см. на упаковке

Дата изготовления: см. на упаковке



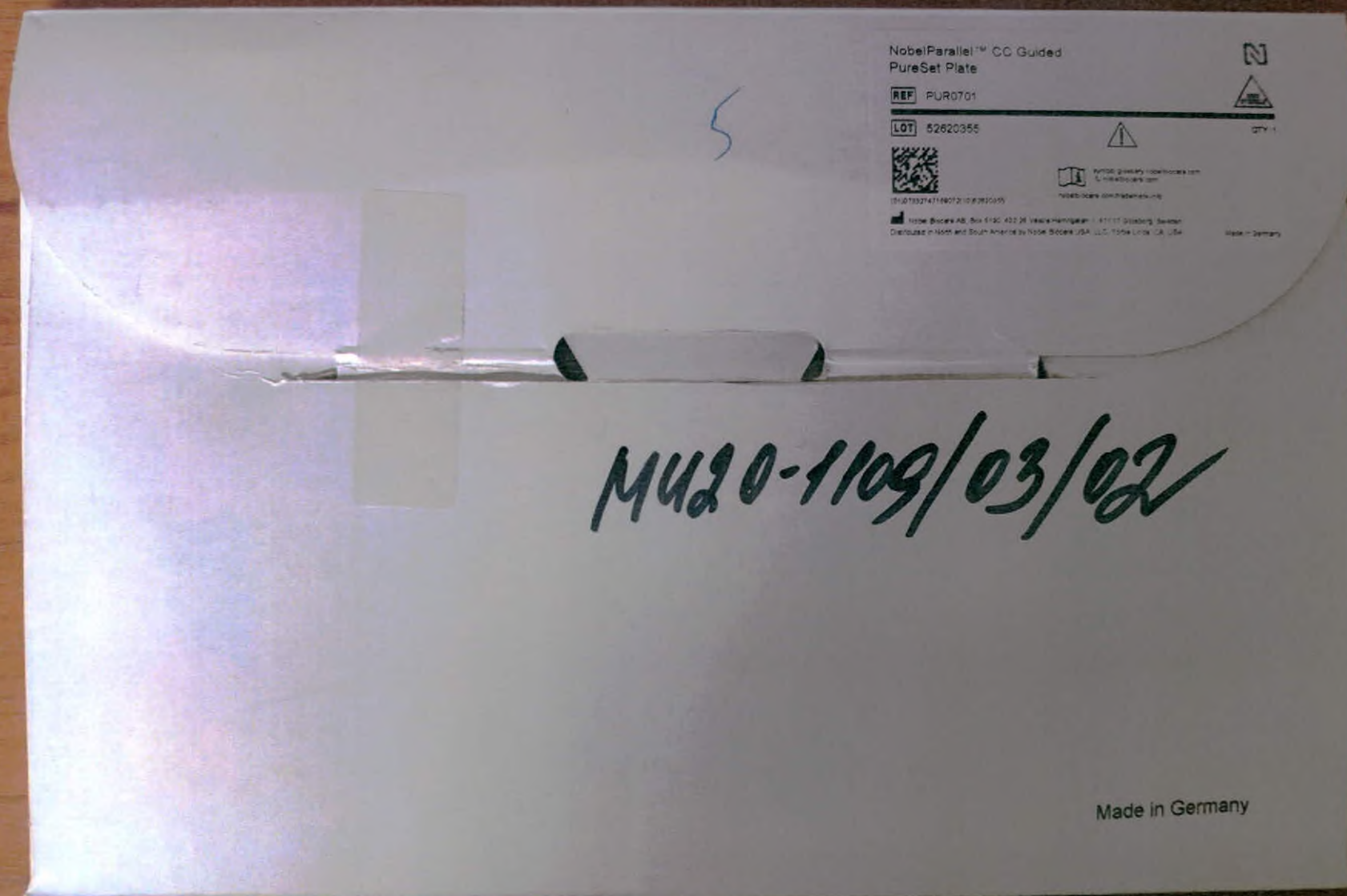




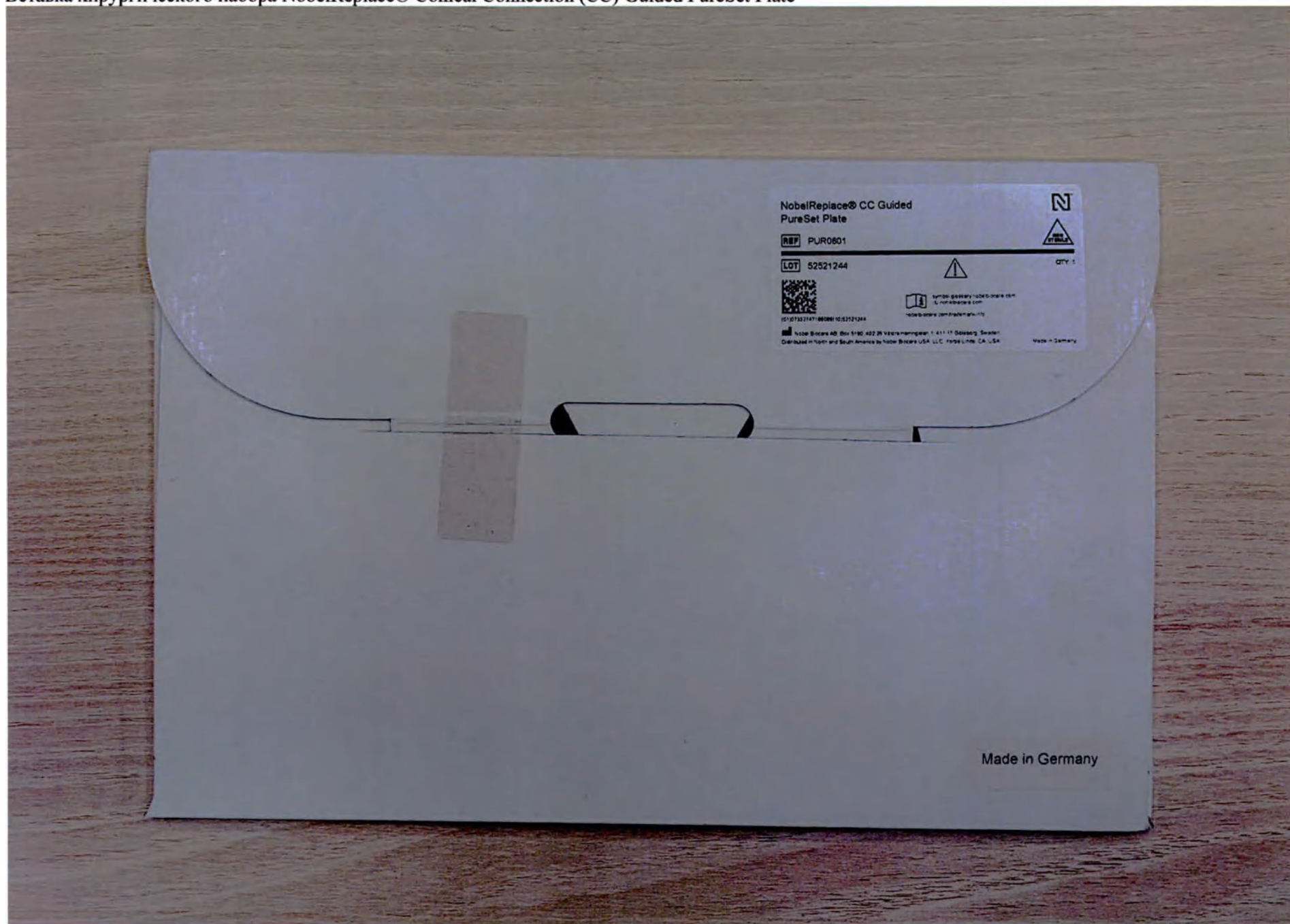







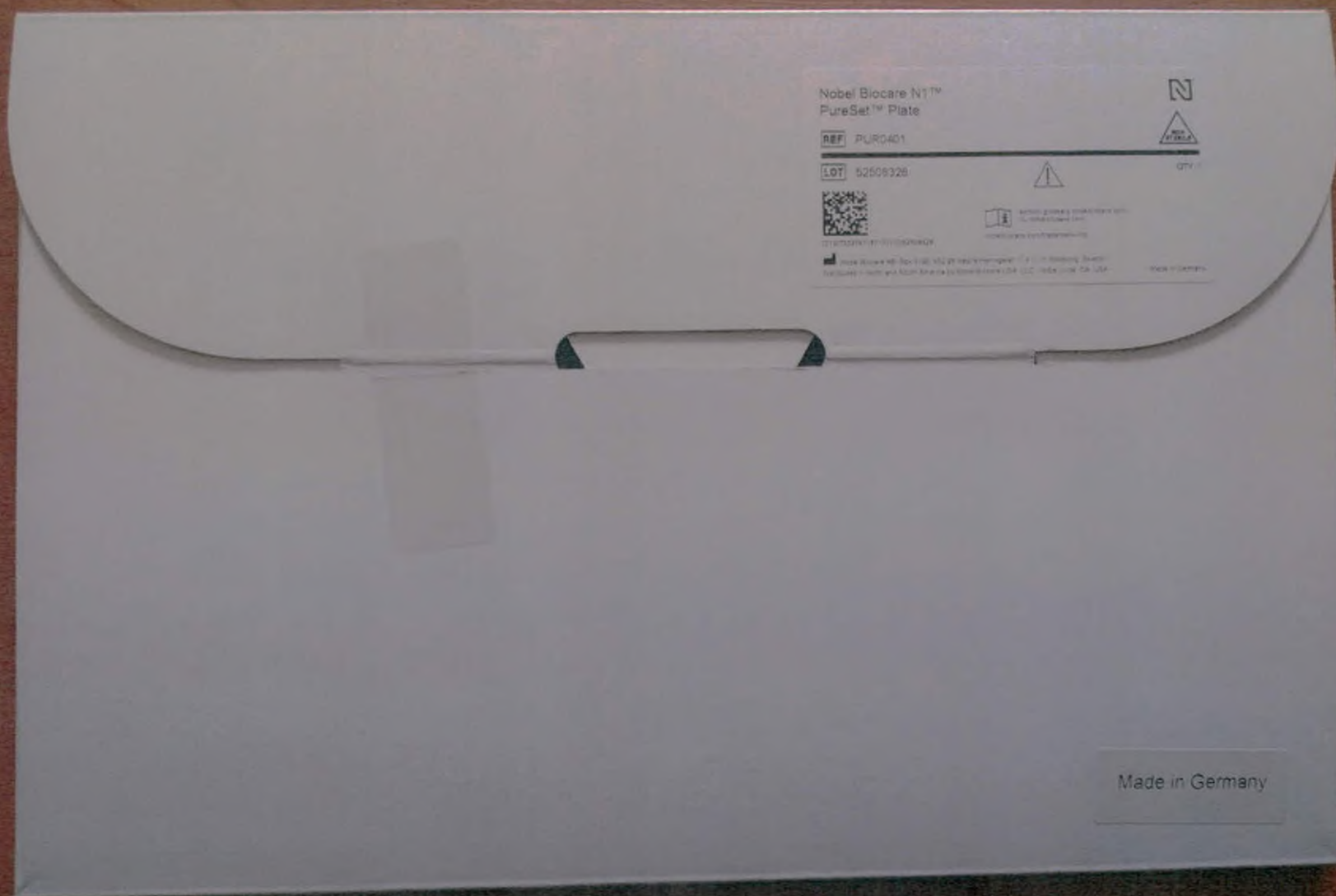

Made in Germany





66