

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Альфа-Регламент»
Челомбитко В.И.

« » 2014 г.




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Реагенты in vitro к гематологическому анализатору ЭЛИТЕ

производства

"Эрба Лахема с.р.о.", Чешская Республика,

Erba Lachema s.r.o., Karasek 1d, 621 33 Brno, Czech Republic

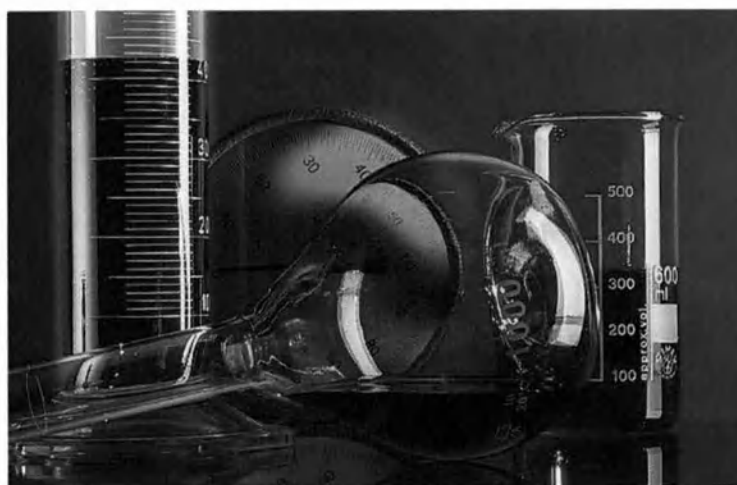

Очищающий раствор ERBA Cleaner

Основное назначение – Очищающий раствор для очищения счетной камеры гематологического анализатора с дифференцировкой лейкоцитов на 3 части.

СОСТАВ: Прозрачный водный раствор, содержит сульфат натрия, безводный 3.0-5.0 г/л, поваренная соль 7.5-11.5 г/л, противогрибковые и антибактериальные средства 1.0-3.0 г/л, буферная система средств 1.0-3.0 г/л, сложный эфир полиэтиленоксида 0.3-1.5 г/л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Раствор поставляется готовым к использованию в бутылке объемом 1 л.

ХРАНЕНИЕ: Срок хранения до даты указанной упаковке при температуре 18-25 °С.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте попадания на кожу и в глаза. В случае контакта с глазами, промойте их немедленно очищенной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Очищающий раствор ERBA Clenz

Основное назначение – Очищающий раствор для очищения счетной камеры гематологического анализатора с дифференцировкой лейкоцитов на 5 частей.

СОСТАВ: Прозрачный водный раствор, содержит сульфат натрия, безводный 3.0-5.0 г/л, поваренная соль 7.5-11.5 г/л, противогрибковые и антибактериальные средства 1.0-3.0 г/л, буферная система средств 1.0-3.0 г/л, сложный эфир полиэтиленоксида 0.3-1.5 г/л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Раствор поставляется готовым к использованию в бутылке объемом 1 л.

ХРАНЕНИЕ: Срок хранения до даты указанной упаковке при температуре 18-25 °С.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте попадания на кожу и в глаза. В случае контакта с глазами, промойте их немедленно очищенной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Лизирующий раствор ERBA Diff 5P

Основное назначение – Лизирующий раствор для приготовления гемолизата (лизиса эритроцитов) для подсчета лейкоцитов с дифференцировкой лейкоцитов на пять частей и определения гемоглобина в камере гематологических анализаторов.

СОСТАВ: Прозрачный водный раствор, содержит Азид натрия < 0.1%, EDTA < 25%, Хлорид калия < 20%, Пропанол-2 < 20%, Аммонийная соль < 20%. pH: 10.2 +/- 0.4 (T=20°C). Удельное сопротивление: 131 +/- 6 Ω (T=20°C).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Раствор поставляется готовым к использованию в бутылке объемом 5 л.

ХРАНЕНИЕ: Срок хранения до даты указанной упаковке при температуре 18-25 °C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте попадания на кожу и в глаза. В случае контакта с глазами, промойте их немедленно очищенной водой и обратитесь за медицинской помощью. Содержит соль аммония.

Раствор дилуэнта ERBA Dil 5P

Основное назначение – Изотонический раствор для подсчета клеток крови и измерения гематокрита в камере для подсчета клеток гематологического анализатора с дифференцировкой лейкоцитов на 5 частей.

СОСТАВ: Прозрачный водный раствор, содержит Сульфат натрия 7.5-11.5 г/л, EDTA < 25%, противогрибковые и антибактериальные средства 0.8-2.5 г/л.

pH: 7.2 +/- 0.1 (T = 20°C). Удельное сопротивление: 63.7 +/- 6 Ω (T = 20°C)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Раствор поставляется готовым к использованию в бутылке объемом 20 л.

ХРАНЕНИЕ: Срок хранения до даты указанной упаковке при температуре 18-25 °C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте попадания на кожу и в глаза. В случае контакта с глазами, промойте их немедленно очищенной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Раствор дилуэнта ERBA Dilluent Diff

Основное назначение – Изотонический раствор для подсчета клеток крови и измерения гематокрита в камере для подсчета клеток гематологического анализатора с дифференцировкой лейкоцитов на 3 части .

СОСТАВ: Прозрачный водный раствор, содержит Хлорид калия < 20%, EDTA < 25%, противогрибковые и антибактериальные средства 0.8-2.5 г/л.

pH: 7.2 +/- 0.1 (T = 20°C). Удельное сопротивление: 63.7 +/- 6 Ω (T = 20°C)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Раствор поставляется готовым к использованию в бутылке объемом 20 л.

ХРАНЕНИЕ: Срок хранения до даты указанной упаковке при температуре 18-25 °C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте попадания на кожу и в глаза. В случае контакта с глазами, промойте их немедленно очищенной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Очищающий раствор ERBA Hypoclean CC

Основное назначение – Очищающий раствор с высокой деппротеинизирующей активностью для очищения счетной камеры гематологического анализатора с дифференцировкой лейкоцитов на 5 частей от веществ белковой структуры.

СОСТАВ: Прозрачный водный раствор, содержит Органический буфер < 20 %,

Гипохлорит натрия < 20 %.

pH: 9,6 +/- 0,4 (T = 20°C). Удельное сопротивление: 72 +/- 2 Ω (T = 20°C).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Раствор поставляется готовым к использованию в бутылке объемом 100 мл.

ХРАНЕНИЕ: Срок хранения до даты указанной упаковке при температуре 18-25 °C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте попадания на кожу и в глаза. В случае контакта с глазами, промойте их немедленно очищенной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Очищающий раствор ERBA Hypoclean

Основное назначение – Очищающий раствор с высокой деппротеинизирующей активностью для очищения счетной камеры гематологического анализатора с дифференцировкой лейкоцитов на 3 части от веществ белковой структуры.

СОСТАВ: Прозрачный водный раствор, содержит Органический буфер < 20 %,

Гипохлорит натрия < 20 %.

pH: 9,6 +/- 0,4 (T = 20°C). Удельное сопротивление: 72 +/- 2 Ω (T = 20°C).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Раствор поставляется готовым к использованию в бутылке объемом 100 мл.

ХРАНЕНИЕ: Срок хранения до даты указанной упаковке при температуре 18-25 °C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте попадания на кожу и в глаза. В случае контакта с глазами, промойте их немедленно очищенной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Лизирующий раствор ERBA Lyse 5P

Основное назначение – Лизирующий раствор для приготовления гемолизата (лизиса эритроцитов) для подсчета лейкоцитов и определения гемоглобина в камере гематологических анализаторов с функцией дифференцировки лейкоцитов на пять частей.

СОСТАВ: Прозрачный водный раствор, содержит Азид натрия < 0.1%, EDTA < 25%, Хлорид калия < 20%, Пропанол-2 < 20%, Аммонийная соль < 20%. pH: 10.2 +/- 0.4 (T=20°C). Удельное сопротивление: 131 +/- 6 Ω (T=20°C).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Раствор поставляется готовым к использованию в бутылке объемом 5 л.

ХРАНЕНИЕ: Срок хранения до даты указанной упаковке при температуре 18-25 °C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте попадания на кожу и в глаза. В случае контакта с глазами, промойте их немедленно очищенной водой и обратитесь за медицинской помощью. Содержит соль аммония.

Лизирующий раствор ERBA Lyse Diff

Основное назначение – Лизирующий раствор для приготовления гемолизата (лизиса эритроцитов) для подсчета лейкоцитов с дифференцировкой на три части и определения гемоглобина в камере гематологических анализаторов.

СОСТАВ: Прозрачный водный раствор, содержит Азид натрия < 0.1%, EDTA < 25%, Хлорид калия < 20%, Пропанол-2 < 20%, Аммонийная соль < 20%. pH: 10.2 +/- 0.4 (T=20°C). Удельное сопротивление: 131 +/- 6 Ω (T=20°C).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Раствор поставляется готовым к использованию в бутылке объемом 1 л.

ХРАНЕНИЕ: Срок хранения до даты указанной упаковке при температуре 18-25 °C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте попадания на кожу и в глаза. В случае контакта с глазами, промойте их немедленно очищенной водой и обратитесь за медицинской помощью. Содержит соль аммония.

Гематологический контроль ERBA высокий уровень

Основное назначение – Контрольная кровь используется для проверки правильности работы гематологического анализатора в области высоких значений

СОСТАВ: Раствор, представляет собой субстанцию, содержащую стабилизированные эритроциты, лейкоциты, тромбоциты в плазме донорской крови.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Раствор поставляется готовым к использованию во флаконах объемом 4,5 мл.

ХРАНЕНИЕ: Стабильность в закрытом флаконе — 70 суток; контроль качества — 2 месяца. Стабильность в открытом флаконе — 14 суток.

Гематологический контроль ERBA низкий уровень

Основное назначение – Контрольная кровь используется для проверки правильности работы гематологического анализатора в области низких значений

СОСТАВ: Раствор, представляет собой субстанцию, содержащую стабилизированные эритроциты, лейкоциты, тромбоциты в плазме донорской крови.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Раствор поставляется готовым к использованию во флаконах объемом 4,5 мл.

ХРАНЕНИЕ: Стабильность в закрытом флаконе — 70 суток; контроль качества — 2 месяца. Стабильность в открытом флаконе — 14 суток.

Гематологический контроль ERBA нормальный уровень

Основное назначение – Контрольная кровь используется для проверки правильности работы гематологического анализатора в области нормальных значений

СОСТАВ: Раствор, представляет собой субстанцию, содержащую стабилизированные эритроциты, лейкоциты, тромбоциты в плазме донорской крови.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Раствор поставляется готовым к использованию во флаконах объемом 4,5 мл.

ХРАНЕНИЕ: Стабильность в закрытом флаконе — 70 суток; контроль качества — 2 месяца. Стабильность в открытом флаконе — 14 суток.



6 мес

