

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Альянс-М»

Орловский Д.А. Орловский Д.А.

« 3 » марта 2023 г.



**Макет маркировки в соответствии с требованиями РФ
медицинского изделия**

Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elason


1.1. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elasun «G-spot air bag X5»: особо тонкие, стимулирующие (с шипами), ароматизированные, со смазкой - 2 шт./упак.



1.2. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elasan «G-spot air bag X5»: особые тонкие, стимулирующие (с шипами), ароматизированные, со смазкой - 6 шт./упак.



2. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elasan «G-spot stimulation»: особо тонкие, стимулирующие (с ребрами и крупными точками), ароматизированные, со смазкой - 10 шт./упак.

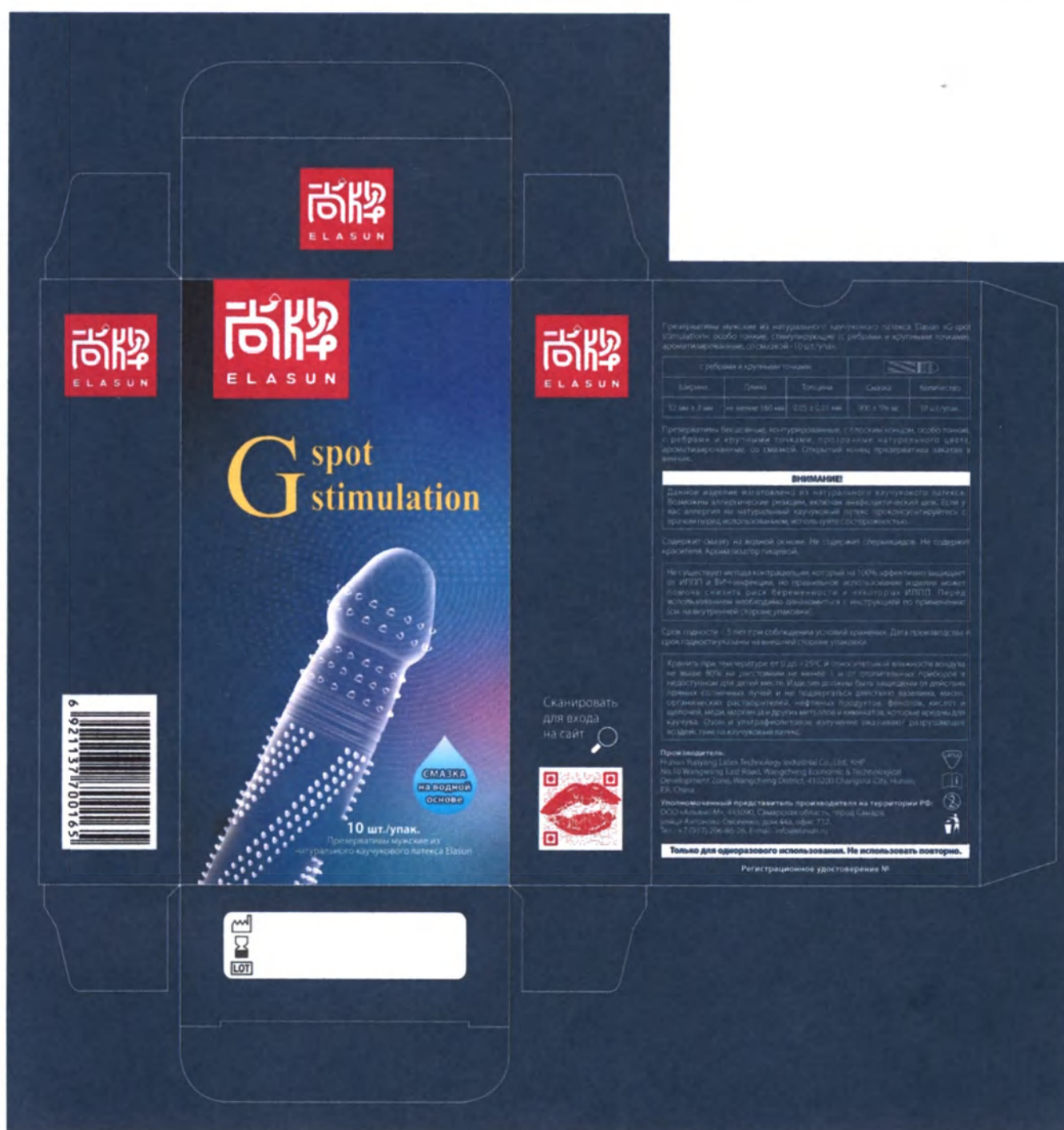


3. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elason «Ribbed and dotted»: особо тонкие, стимулирующие (с ребрами и точками), ароматизированные, со смазкой - 10 шт./упак.



-

5. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elasan «Orgasm and dotted»: особо тонкие, стимулирующие (с крупными точками), ароматизированные, с увеличенным количеством смазки - 10 шт./упак.

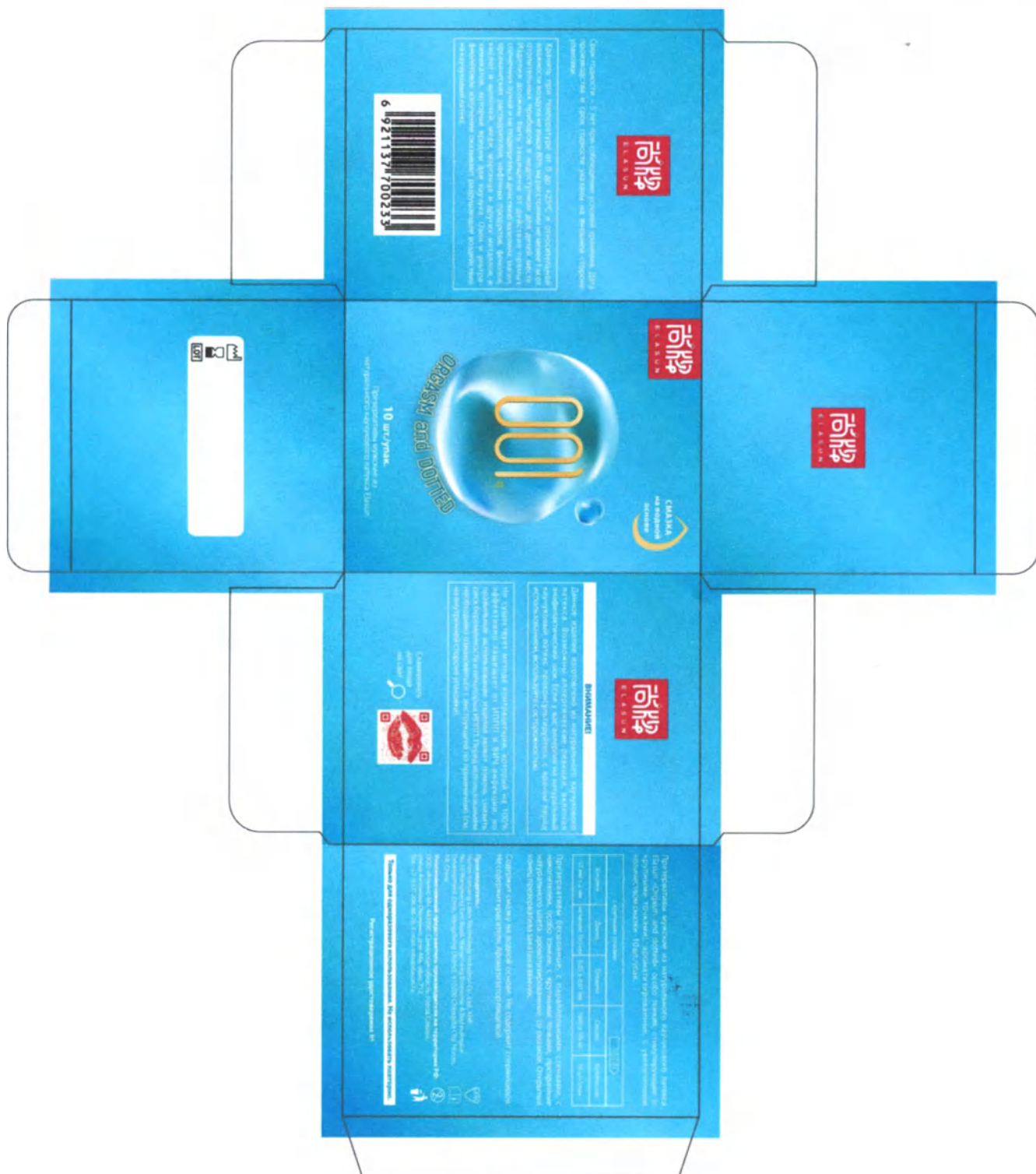

6.1. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elasan «Slim fit»: ультратонкие, гладкие, плотно облегающие, ароматизированные, с увеличенным количеством смазки - 10 шт./упак.



6.2. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elasan «Slim fit»: ультратонкие, гладкие, плотно облегающие, ароматизированные, с увеличенным количеством смазки - 60 шт./упак.



7.1. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elasan «Ultra-thin and smooth» ультратонкие, гладкие, ароматизированные, со смазкой - 3 шт./упак.



7.2. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elason «Ultra-thin and smooth» ультратонкие, гладкие, ароматизированные, со смазкой - 10 шт./упак.



- 尚牌**
ELASUN

尚牌
ELASUN

СМАЗКА
НА ВОДНОЙ
ОСНОВЕ

尚牌
ELASUN

QUEEN

12 шт./упак.
Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elason

6 921137 760336

Сканировать для входа на сайт

Производитель:
Hunan Yitong Latex Technology Industrial Co., Ltd. 90P
No.10 Wangcheng East Road, Wangcheng Economic & Technological Development Zone, Wangcheng District, 410200 Changsha City, Hunan, P.R. China

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «Альтек», МП, 443099, Самарская область, город Самара,
уллица Автомова-Овсеченко, дом 44а, офис 712,
тел.: +7 (937) 206-86-26. E-mail: info@elastex.ru

Регистрационное удостоверение ИР

Хранить при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в недоступности для детей месте. Изделия должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и не подвергаться действию озона, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей, меда, марганца и других металлов и химических веществ, которые вредны для латекса. Озон и ультрафиолетовое излучение оказывают разрушающее воздействие на каучуковый латекс.

гладкие				
Ширина	Длина	Толщина	Смазка	Количество
52 мм ± 2 мм	не менее 160 мм	0,04 ± 0,006 мм	2000 ± 5% мг	12 шт./упак.

9. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elason «Iron Man» с физической задержкой эякуляции: утолщенные, гладкие, ароматизированные, со смазкой - 2 шт./упак.



10.1. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elason «Go Bananas» для небАнального секса: ультратонкие, гладкие, ароматизированные, с увеличенным количеством смазки - 2 шт./упак.

10.2. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elason «Go Bananas» для небАнального секса: ультратонкие, гладкие, ароматизированные, с увеличенным количеством смазки - 10 шт./упак.



11. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elason «Strawberry» для орального секса: ультратонкие, гладкие, ароматизированные, без смазки - 10 шт./упак.



12. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elasan «Ice»: ультратонкие, гладкие, плотно облегающие, ароматизированные, со смазкой - 10 шт./упак.



Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elasan

Инструкция по применению

Назначение: изделие предназначено для целей контрацепции и(или) предотвращения передачи инфекций половым путем. Изготовлено в виде чехла из натурального каучукового латекса, которое полностью покрывает пенис во время полового акта, чтобы препятствовать доступу спермы к женским половым путям и/или предотвратить передачу инфекций половым путем. Это не стерильное изделие одноразового использования. Описание изделия (его конструктивные особенности), основные характеристики, материал, наличие/отсутствие смазки - указаны на внешней стороне упаковки.

Изделие предназначено для использования непрофессионалами, в соответствии с инструкцией по применению. Для индивидуального использования в том числе в домашних условиях.

Показания: для целей контрацепции и(или) предотвращения передачи инфекций половым путем

Противопоказания: индивидуальная непереносимость (повышенная чувствительность к компонентам изделия)

Возможные побочные эффекты: возможны аллергические реакции со стороны натурального каучукового латекса

Меры предосторожности

1. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2. Перед использованием убедитесь в целостности изделия и его упаковки. Запрещается использовать изделие, если оно имеет видимые дефекты и/или его упаковка повреждена.
3. Перед использованием проверьте срок годности. Не используйте изделие после истечения срока годности, указанного на упаковке.
4. Презерватив изготовлен из натурального каучукового латекса. Возможны аллергические реакции со стороны натурального каучукового латекса, включая анафилактический шок. Если у вас аллергия на натуральный каучуковый латекс проконсультируйтесь с врачом перед использованием, используйте с осторожностью.
5. Презерватив следует надевать перед любым физическим контактом на эрегированный пенис. Не существует метода контрацепции, который на 100% эффективно защищает от ИППП и ВИЧ-инфекции, но правильное использование изделия может помочь снизить риск беременности и некоторых ИППП.
6. Данное изделие только для одноразового использования. Повторное использование может привести к нарушению целостности презерватива или увеличить риск заражения инфекциями, передающимися половым путем. Если презерватив используется сначала для орального секса, для других последующих видов секса следует использовать новый презерватив.
7. С презервативом следует обращаться осторожно, в том числе осторожно извлекать из упаковки, чтобы не повредить его ногтями, украшениями и т.д.
8. Если чувствуете, что презерватив соскальзывает или становится слишком тугим, остановитесь и проверьте его, так как данная проблема может привести к разрыву презерватива.
9. Если презерватив протечет или порвется во время использования, обратитесь в медицинское учреждение как можно скорее - в течение 72 часов.
10. Презервативы, используемые при невагинальном половом акте, увеличивают вероятность разрыва или соскальзывания. Для анального секса или в случае необходимости используйте дополнительную смазку на внешней стороне презерватива.
11. В качестве дополнительной смазки выбирайте соответствующие рекомендованные типы. Избегайте смазки на нефтяной основе, такой как вазелин, детские масла, гели для душа, массажные масла, сливочное масло, маргарин и т.д., поскольку они могут повредить целостность презерватива.
12. Проконсультируйтесь с лечащим врачом о совместимости лекарственных средств, контактирующих с презервативом во время его использования.
13. Презервативы могут представлять опасность удушья. Хранить в недоступном для детей месте.
14. Изделия должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей, меди, марганца и других металлов и химикатов, которые вредны для каучука. Озон и ультрафиолетовое излучение оказывают разрушающее воздействие на каучуковый латекс.

Порядок применения

1. Аккуратно откройте упаковку и извлеките презерватив.
2. Большим и указательным пальцами слегка сожмите кончик презерватива, чтобы выдавить из него воздух.
3. Поместите презерватив на эрегированный пенис.
4. Убедитесь, что скрученная часть презерватива находится на внешнем крае, зафиксируйте кончик презерватива и одновременно с этим другой рукой натяните презерватив до основания пениса.
5. После эякуляции презерватив необходимо плотно придержать у основания, и снять как можно быстрее.
6. После использования сверните использованный презерватив и поместите его в одноразовый пакет, завяжите пакет или закройте его с использованием стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание. Запрещается смывать изделие в унитаз.

[Схематическое изображение использования презерватива]



Дополнительная информация (только для варианта исполнения Elasan «G-spot air bag X5»):

Презерватив следует надеть в соответствии с выбранной для секса позой так, чтобы при проникновении стимулирующая часть с шипами находилась в месте расположения точки G партнерши (Примечание: Точка G находится на верхней стенке влагалища в 3-5 см от входа. При проникновении спереди презерватив следует надевать фактурной точечной поверхностью вверх; при проникновении сзади — фактурной точечной поверхностью вниз).

Условия хранения и эксплуатации

Медицинское изделие следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0 до +25°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Изделия должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей, меди, марганца и других металлов и химикатов, которые вредны для каучука. Озон и ультрафиолетовое излучение оказывают разрушающее воздействие на каучуковый латекс. Хранить в недоступном для детей месте.

Специальных условий эксплуатации, при использовании согласно назначению, показаниям, противопоказаниям, способу применения, с учетом возможных побочных эффектов и мер предосторожности, нет. В период эксплуатации презерватив находится в организме человека. Температура эксплуатации от +32 до +42°C

Срок годности изделия: 5 лет с даты производства (см. на внешней стороне упаковки).

Утилизация и требования по охране окружающей среды

После применения сверните использованный презерватив и поместите его в одноразовый пакет, завяжите пакет или закройте его с использованием стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание. Запрещается смывать изделие в унитаз. Утилизация изделий должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов по утилизации продукции, принятых в стране применения медицинского изделия.

После применения медицинского изделия по назначению оно должно быть утилизировано как потенциально опасные отходы класса Б в соответствии требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

При истечении срока годности и/или нарушении целостности герметичной упаковки медицинское изделие должно быть утилизировано как медицинские отходы класса А в соответствии требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

При производстве, хранении, транспортировке и эксплуатации изделия не выделяют в окружающую среду токсических веществ и не оказывают (при непосредственном контакте) вредного влияния на организм человека. Работа с изделиями не требует особых мер предосторожности.

Гарантийные обязательства

Перед использованием изделия необходимо внимательно изучить инструкцию по применению. Производитель гарантирует соответствие требованиям международных и национальных стандартов в течение всего срока годности продукции при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, установленных производителем. Производитель не несет ответственности за использование медицинского изделия не по назначению.

В случае нарушения целостности упаковки, при выявлении каких-либо других дефектов упаковки или самого изделия, свяжитесь с производителем или его уполномоченным представителем на территории Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-М» (ООО «Альянс-М») Российская Федерация, 443090, Самарская область, город Самара, улица Антонова-Овсеенко, дом 44а, офис 712, тел.: +7(937)206-86-26, e-mail: info@elasun.ru

Производитель и разработчик: Hunan Yunyang Latex Technology Industrial Co., Ltd.

Юридический и фактический адрес, адрес производства: No.10 Wangwang East Road, Wangcheng Economic & Technological Development Zone, Wangcheng District, 410200 Changsha City, Hunan, P.R. China

Телефон/факс: 0731-88052518

Символы и обозначения

						
Содержит натуральный латекс	Обратитесь к инструкции по применению	Не использовать повторно	Соблюдать санитарное состояние окружающей среды	Дата изготовления	Использовать до...	Код партии

листов

прошнуровано,
прошнуровано



Директор
ООО «Альянс-М»
А.А. Смирнов
Смирнов

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Альянс-М»

Орловский Орловский Д.А.

« 3 » *августа* 2023 г.



**Фотографические изображения
общего вида медицинского изделия**

Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elasan

1.1. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elason «G-spot air bag X5»: особо тонкие, стимулирующие (с шипами), ароматизированные, со смазкой - 2 шт./упак.



1.2. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elason «G-spot air bag X5»: особо тонкие, стимулирующие (с шипами), ароматизированные, со смазкой - 6 шт./упак.



2. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elason «G-spot stimulation»: особо тонкие, стимулирующие (с ребрами и крупными точками), ароматизированные, со смазкой - 10 шт./упак.



3. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elasan «Ribbed and dotted»: особо тонкие, стимулирующие (с ребрами и точками), ароматизированные, со смазкой - 10 шт./упак.



4. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elason «Big dotted»: особо тонкие, стимулирующие (с крупными точками), ароматизированные, со смазкой - 10 шт./упак.



5. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elasan «Orgasm and dotted»: особо тонкие, стимулирующие (с крупными точками), ароматизированные, с увеличенным количеством смазки - 10 шт./упак.



6.1. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elasun «Slim fit»: ультратонкие, гладкие, плотно облегающие, ароматизированные, с увеличенным количеством смазки - 10 шт./упак.



6.2. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elasan «Slim fit»: ультратонкие, гладкие, плотно облегающие, ароматизированные, с увеличенным количеством смазки - 60 шт./упак.



7.1. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elasun «Ultra-thin and smooth» ультратонкие, гладкие, ароматизированные, со смазкой - 3 шт./упак.



7.2. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elason «Ultra-thin and smooth» ультратонкие, гладкие, ароматизированные, со смазкой - 10 шт./упак.



8. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elasun «Queen»: ультратонкие, гладкие, ароматизированные, с увеличенным количеством смазки - 12 шт./упак.



9. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elason «Iron Man» с физической задержкой эякуляции: утолщенные, гладкие, ароматизированные, со смазкой - 2 шт./упак.



10.1. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elasan «Go Bananas» для небАнального секса: ультратонкие, гладкие, ароматизированные, с увеличенным количеством смазки - 2 шт./упак.



10.2. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elason «Go Bananas» для небАнального секса: ультратонкие, гладкие, ароматизированные, с увеличенным количеством смазки - 10 шт./упак.



11. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elason «Strawberry» для орального секса: ультратонкие, гладкие, ароматизированные, без смазки - 10 шт./упак.



12. Презервативы мужские из натурального каучукового латекса Elasin «Ice»: ультратонкие, гладкие, плотно облегающие, ароматизированные, со смазкой - 10 шт./упак.





Пронумеровано,
пронумеровано

17 листов