


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Орто Медикл Групп»

В.Ю. Задорожний

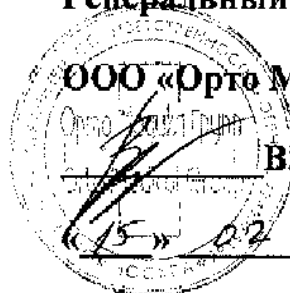

2011 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**«Изделия протезно-ортопедические: ортезы на верхние конечности,
корсеты ортопедические, корректоры осанки, реклинаторы»**

производства «Rehard Technologies GmbH», Германия

Ортез на локтевой сустав DEL-204

Назначение:

- средняя степень фиксации локтевого сустава при лечении травм и хронических воспалительных заболеваний сустава;
- компрессионный эффект способствует устранению отеков, уменьшению боли;
- Специальные гелевые подушечки, надежно фиксированные к ткани, обеспечивают оптимальное прилегание ортеза к суставу, постоянную защиту костных выступов и интенсивную стимуляцию проприоцепторов (рецепторов «суставного» чувства);
- Эластичная ткань ортеза и многочисленные мягкие шипы гелевых подушечек оказывают на область сустава массажное воздействие, улучшающее кровообращение и восстановление тканей.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- эластичный ортез на локтевой сустав;
- анатомическая форма ортеза;
- две специальные гелевые подушечки восьмиобразной формы надежно фиксированы к ткани ортеза.

Способ применения:

Надевается на локтевой сустав так, чтобы гелевые подушечки защищали надмышечки плечевой кости (косточки, выступающие по бокам локтевого сустава).

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: аэропрен.

Ортез на локтевой сустав для детей DEL-204(P)

Назначение:

- средняя степень фиксации локтевого сустава при лечении травм и хронических воспалительных заболеваний сустава;
- компрессионный эффект способствует устранению отеков, уменьшению боли;
- Специальные гелевые подушечки, надежно фиксированные к ткани, обеспечивают оптимальное прилегание ортеза к суставу, постоянную защиту костных выступов и интенсивную стимуляцию проприоцепторов (рецепторов «суставного» чувства);
- Эластичная ткань ортеза и многочисленные мягкие шипы гелевых подушечек оказывают на область сустава массажное воздействие, улучшающее кровообращение и восстановление тканей.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- эластичный ортез на локтевой сустав;

- эластичный ортез на локтевой сустав;
- анатомическая форма ортеза;
- две специальные гелевые подушечки восьмиобразной формы надежно фиксированы к ткани ортеза.

Способ применения:

Надевается на локтевой сустав так, чтобы гелевые подушечки защищали надмышечки плечевой кости (косточки, выступающие по бокам локтевого сустава).

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: аэропрен.

Ортез на локтевой сустав HES-304

Назначение:

- Полная фиксация с регулируемым объемом движения.
- Ортез, за счет своей шарнирной конструкции, позволяет поэтапно расширять объем движений в локтевом суставе (по 10 градусов) для раннего возврата подвижности после травм и операций, что особенно важно для раннего функционального лечения переломов костей, образующих локтевой сустав.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

ортез состоит из

- двух манжет из синтетического материала с тканевым покрытием на предплечье и плечо;
- двух металлических шин с шарниром, регулирующим объем движений через 10°;
- четырех ремней с застежками «Велкро»;
- ремня для удобства ношения ортеза.

Способ применения:

- Закрепляются манжеты на плечо и предплечье.
- К манжетам крепятся шинки с шарниром, ось которого должна соответствовать оси сустава.
- Ортез плотно фиксируется лентами с застежками "Велкро", которые пропускаются в петли на шинках.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: поролон, нейлон, полиэстер, хлопок.

Ортез на локтевой сустав TEL-304

Назначение:

- обеспечивает стабилизацию локтевого сустава при лечении травм, воспалительных процессов, предохраняет от чрезмерного разгибания локтевого сустава.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- шарнирный ортез с металлической шиной;
- два фиксирующих ремня с застежками «Велкро».

Способ применения:

После надевания ортеза зафиксируйте ленты-застежки. Может одеваться как на левую, так и на правую сторону.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: поролон, хлопок, нейлон, металлические шины.

Ортез на плечевой сустав для детей DS-205(P)

Назначение:

- сильная фиксация и микромассаж плечевого сустава;
- равномерная компрессия;
- улучшает кровообращение;
- способствует увеличению кислорода в тканях;
- стимулирует процессы восстановления мышц и связок.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- Эластичная ткань специальной вязки обеспечивает компрессионное воздействие на мягкие ткани плечевого сустава, снижая мышечное напряжение и уменьшая отек.
- Система гибких ремней позволяет производить индивидуальную подгонку и осуществлять необходимое ограничение движений в плечевом суставе.
- Гелевая вставка стабилизирует положение головки плеча в плечоидальной ямке, уменьшает боли в плече.

Способ применения:

Ортез выпускается на правую и на левую руку. Ортез надевается на руку так, чтобы гелевая вставка располагалась на области плеча.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: эластик, гелевая вставка.

Ортез на плечевой сустав DS-205

Назначение:

- сильная фиксация и микромассаж плечевого сустава;
- равномерная компрессия;
- улучшает кровообращение;
- способствует увеличению кислорода в тканях;
- стимулирует процессы восстановления мышц и связок.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- Эластичная ткань специальной вязки обеспечивает компрессионное воздействие на мягкие ткани плечевого сустава, снижая мышечное напряжение и уменьшая отек.
- Система гибких ремней позволяет производить индивидуальную подгонку и осуществлять необходимое ограничение движений в плечевом суставе.
- Гелевая вставка стабилизирует положение головки плеча в гленоидальной ямке, уменьшает боли в плече.

Способ применения:

Ортез выпускается на правую и на левую руку. Ортез надевается на руку так, чтобы гелевая вставка располагалась на области плеча.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: эластик, гелевая вставка.

Ортез на плечевой сустав RS-129

Назначение:

- сильная фиксация и микромассаж плечевого сустава;
- равномерная компрессия;
- согревание, тепловой эффект;
- улучшает кровообращение;
- способствует увеличению кислорода в тканях;
- стимулирует процессы восстановления мышц и связок.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- бандаж на плечевой сустав;
- ремень с застежкой «Велкро» вокруг грудной клетки;
- жесткий пелот на область плеча;
- дополнительный съемный ремень, усиливающий возможности мобилизации плечевого сустава.

Способ применения:

Ортез надевается через руку, располагается в области плечевого сустава, закрепляется пояс через грудную клетку, затем дополнительным ремнем устанавливается необходимое ограничение отведения в плечевом суставе.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: неопрен, нейлон, полиэстер, полиэтилен.

Ортез на плечевой сустав и руку SA-209

Назначение:

- иммобилизация плечевого сустава с углом отведения плеча от 10 до 60 градусов;
- разгрузка сустава;
- предотвращение образования спаек в субакромиальном, субкораконидном и субдельтовидном пространствах;
- иммобилизация с разгрузкой плечевого сустава в горизонтальной плоскости при углах отведения плеча от 60 до 70 градусов.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- Ортез обеспечивает надежное крепление и стабильность конструкции.
- К поверхности тела прилегает мягкий гипоаллергенный материал.
- Подгонка и регулировка ортеза (прилегание к телу и угол отведения плеча) осуществляется за счет степени накаченности шины и фиксирующих ремней с Y-образными застежками-липучками «Велкро» и фиксирующих элементов с креплением «Велкро».

Способ применения:

Размер универсальный. Предусмотрена модель на правое или левое плечо.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа);
- плечевой артродез;

- задняя нестабильность плечевого сустава.

Состав: полиуретановый поролон, нейлон, полиэстер, хлопок, поливинилхлорид.

Ортез на плечевой сустав и руку SA-300

Назначение:

- Ортез обеспечивает фиксацию плечевого сустава в функционально-выгодном положении за счет отведения плеча под углом 30°, 60° или 90°.

- Разгружает плечевой сустав за счет опоры на торец.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- Ортез выполнен из жесткой легкой рамы, обеспечивающей надежное крепление и стабильность конструкции.
- К поверхности тела прилегает мягкий гипоаллергенный материал.
- Подгонка и регулировка ортеза (прилегание к телу и угол отведения плеча) осуществляется за счет фиксирующих ремней с Y-образными застежками-липучками «Велкро» и фиксирующих элементов с креплением «Велкро».
- Для удобства использования у женщин выемка верхнего края в передней части ортеза может быть увеличена путем подрезания.

Способ применения:

Размер подбирается по росту. Предусмотрена модель на правое или левое плечо.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: полиуретановый поролон, нейлон, полиэстер, хлопок, поливинилхлорид, сплав алюминия, сплав стали, полистилен.

Ортез на плечевой сустав и руку SI-130

Назначение:

- фиксирует плечо и предплечье к туловищу;
- используется при лечении переломов хирургической шейки плеча и верхней трети плеча с незначительным смещением, переломах плечевой кости в верхней трети плеча;
- назначается для фиксации плечевого пояса при ушибах, повреждениях связок, вывихов, подвывихов в плечевом суставе и акромиально - ключичном сочленении, включенных и без смещения переломах хирургической шейки плечевой кости.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- облегченная конструкция с фиксирующим ремнем и манжетом на плечевой сустав;
- внутренняя текстильная часть изготовлена из 100% хлопкового трикотажа, наружная – сложный полиэфир;
- дополнительные ленты с застежками «Велкро».

Способ применения:

Предплечье закрепляется в манжете и фиксируется с помощью застежки «Велкро».

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения биндажа);
- заболевания кожи (в области применения биндажа).

Состав: полиуретановый поролон, хлопок, полиэстер, нейлон.

Ортез на плечевой сустав и руку SI-311

Назначение:

- фиксирует плечо и предплечье к туловищу;
- используется при лечении травм и после операций плечевого пояса, плеча и локтевого сустава;
- назначается для фиксации плечевого пояса при ушибах, повреждениях связок, вывихов, подвывихов в плечевом суставе и акромиально - ключичном сочленении, включенных и без смещения переломах хирургической шейки плечевой кости;
- при лечении функциональным методом артрозов, артритов, плечелопаточных периартритов, параличей верхней конечности, плекситов, невритов, повреждений сплетений и нервов.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- выполнен из прочного «дышащего» неэластичного материала;
- состоит из муфты для предплечья и плечевого каркаса. Муфта крепится к плечевому каркасу с помощью лент с застежками-липучками «Велкро»;
- плечо дополнительно фиксируется к туловищу с помощью фиксаторов с застежками-липучками «Велкро»;
- в ортезе предусмотрена возможность постепенного увеличения объема движения в плечевом суставе для осуществления функционального лечения.

Способ применения:

Плечевой каркас надевается на туловище.

Предплечье укладывается в муфту.

Фиксирующими ремнями с застежками-липучками «Велкро» закрепляется положение плеча и предплечья.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: полиуретановый поролон, хлопок, полиэстер, нейлон.

Ортез на лучезапястный сустав DWR-202

Назначение:

- средняя степень фиксации лучезапястного сустава при лечении травм и хронических воспалительных заболеваний сустава;
- сохраняет тепло и улучшает кровообращение в области сустава;
- обладает противоотечным действием;
- способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу;
- компрессионный и массажный эффекты ортеза способствуют сокращению сроков лечения и реабилитации.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- эластичный ортез на лучезапястный сустав, напульсник анатомической формы;
- специальная тепловая подушечка в проекции шиловидного отростка локтевой кости;
- съемный эластичный ремень-фиксатор с застежкой "Велкро";
- ортезы производятся отдельно на правый и левый лучезапястный сустав.

Способ применения:

Надевается на лучезапястный сустав.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)

Состав: нейлон, эластик, спандекс.

Ортез на лучезапястный сустав WRS-202

Назначение:

- средняя степень фиксации лучезапястного сустава при лечении травм и хронических воспалительных заболеваний сустава;
- сохраняет тепло и улучшает кровообращение в области сустава;
- обладает противоотечным действием;

- способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу;

- компрессионный и массажный эффекты ортеза способствуют сокращению сроков лечения и реабилитации.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- изготовлен из аэропрена;
- усилен жесткой металлической вставкой, полностью ограничивающей движение в лучезапястном суставе, которая в случае необходимости может быть изогнута;
- затяжка с застежкой «Велкро» фиксирует ортез в правильном положении и поддерживает сухожилия сгибателей и разгибателей кисти.

Способ применения:

Надевается на лучезапястный сустав.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)

Состав: аэропрен, хлопок, эластик, нейлон, лайкра.

Ортез на лучезапястный сустав WRS-202(P)

Назначение:

- ограничивает подвижность и обеспечивает сильную фиксацию лучезапястного сустава;
- способствует уменьшению отеков и ускорению выздоровления;
- ограничение подвижности сустава способствует снижению болевого синдрома.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- ремень с застежкой-липучкой «Велкро» позволяет регулировать давление при отеках.

Способ применения:

Надевается на лучезапястный сустав.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: аэропрен, хлопок, эластик, нейлон, лайкра.

Ортез на лучезапястный сустав WRS-302

Назначение:

- Полная фиксации лучезапястного сустава и большого пальца в положении отведения.
- Фиксация и равномерная компрессия суставов при лечении травм, артритов, после операций на суставах большого пальца, лучезапястном суставе и при болевом синдроме.
- Используется вместо или после снятия гипсовой повязки.
- Эффективен после травм и операций на предплечье, при травматических невропатиях периферических нервов, нестабильности лучезапястного сустава.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- Изготовлен из эластичного, дышащего материала, эффективно поддерживающего температурный баланс кожи.
- Усилен двумя металлическими пинами, полностью ограничивающими движения в суставах большого пальца и лучезапястном суставе.
- Затяжки с застежками «Велкро» на предплечье и на большом пальце фиксируют ортез в оптимальном положении и поддерживают сухожилия сгибателей и разгибателей кисти и позволяют быстро регулировать давление при отеках, двигать пальцами кисти для проведения необходимых лечебных мероприятий.

Способ применения:

Надевается на лучезапястный сустав.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)

Состав: нейлон, полиэстер, лайкра, поролон.

Ортез на лучезапястный сустав WRS-302(P)

Назначение:

- обеспечивает фиксацию лучезапястного сустава и большого пальца в положении отведения;
- поддерживает сухожилия сгибателей и разгибателей кисти;
- обеспечивает фиксацию и равномерную компрессию суставов при лечении травм, после операций на суставах большого пальца, лучезапястном суставе и при болевом синдроме.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- конструкция ортеза позволяет сохранить возможность кистевого хвата;
- ремни-фиксаторы позволяют регулировать давление при отеках.

Способ применения:

Надевается на лучезапястный сустав.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная переносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения биндажа);
- заболевания кожи (в области применения биндажа).

Состав: нейлон, полиэстер, лайкра, поролон.

Ортез на лучезапястный сустав WRS-306

Назначение:

- Полная фиксации лучезапястного сустава.
- Согревает, обеспечивает равномерную компрессию сустава при лечении травм, после снятия гипсовых повязок.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- анатомически удобная, индивидуально изгибаемая алюминиевая шина;
- фиксирующие ремни с застежками «Велкро»;
- ортезы производятся отдельно на правый и левый лучезапястный сустав.

Способ применения:

Надевается на лучезапястный сустав.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения биндажа)
- заболевания кожи (в области применения биндажа)

Состав: хайпалон, ССВ (соединение синтетических волокон), нейлон.

Ортез на лучезапястный сустав WRS-308

Назначение:

- Ортез предназначен для полной фиксации лучезапястного сустава.
- Обеспечивает фиксацию и равномерную компрессию суставов при лечении травм, артритов, после операций на суставах большого пальца, лучезапястном суставе и при болевом синдроме.
- Ортез используют вместо или после снятия гипсовой повязки.
- Эффективен после травм и операций на предплечье, при травматических невропатиях периферических нервов, нестабильности лучезапястного сустава.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- анатомически удобная, индивидуально изгибаемая алюминиевая шина;
- фиксирующие ремни с застежками «Велкро»;
- ортезы производятся отдельно на правый и левый лучезапястный сустав.

Способ применения:

Надевается на лучезапястный сустав.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)

Состав: хайпалон, ССВ (соединение синтетических волокон), нейлон.

Ортез на лучезапястный сустав WRS-310

Назначение:

- Полная фиксация лучезапястного сустава и костей предплечья в нижней трети.
- Фиксация и равномерная компрессия суставов при лечении травм, артритов и при болевом синдроме.
- Используется вместо или после снятия гипсовой повязки.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- конструкция предусматривает сохранение функции кистевого хвата, что позволяет проводить раннее функциональное лечение (ЛФК);
- затяжки с застежками «Велкро» на предплечье позволяют регулировать давление при отеках, не провоцируя "эффект жгута";
- анатомически изогнутаяшина обеспечивает комфорт ношения и плотное прилегание ортеза в области ладонного изгиба.

Способ применения:

Перед использованием выбрать ортез на правую или левую руку. Расстегнуть ремни-фиксаторы. Надеть ортез на лучезапястный сустав так, чтобы шина расположилась по ладонной поверхности предплечья. Застегнуть ремни-фиксаторы.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: нейлон, полиэстер, лайкра, поролон.

Ортез на лучезапястный сустав WRS-402

Назначение:

- Ортез с формуемой шиной для фиксации лучезапястного сустава и пальцев кисти.
- Консервативное лечение артралгий, артритов, артрозов лучезапястного, запястно-пястных суставов.
- Реабилитация после переломов костей запястья, вывихов (подвывихов) в лучезапястном и запястно-пястных суставах.
- В комплексном лечении карпального туннельного синдрома.
- Фиксация при травмах и воспалительных заболеваниях сухожильно-связочного аппарата лучезапястного и запястно-пястных суставов.
- Реабилитация после операций на лучезапястном и запястно-пястных суставах.

- Поддержка и лечение при разрывах мышц-разгибателей кисти.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- формованная шина выполнена из легкого прочного материала;
- предплечье и ладонь крепится к шине с помощью фиксирующих ремней с застежками-липучками «Велкро»;
- в ортезе предусмотрена возможность фиксации лучезапястного, запястно-пястных суставов и большого пальца руки в функционально-выгодном положении.

Способ применения:

Шина предварительно формовывается. Запястье укладывается на шину и фиксируется ремнями.

Фиксируется положение большого пальца руки.

Ограничения и противопоказания:

- первые трое суток острой травмы;
- острые гнойные воспалительные заболевания;
- опухолевые заболевания в области применения ортеза.

Предупреждения:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- заболевания, при которых противопоказана гипертермия;
- заболевания кожи (в области применения ортеза);
- при возникновении физического дискомфорта, раздражения следует немедленно проконсультироваться с лечащим врачом о возможности дальнейшего применения ортеза.

Состав: полиуретановый поролон, нейлон, полиэстер, хлопок, ССВ (соединение синтетических волокон).

Ортез на пястно-фаланговый сустав FG-100

Назначение:

Стабилизирует суставы и фаланги пальцев.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- изготовлен из профилируемого дюралюминия;
- имеет мягкую подкладку для профилактики возникновения натертостей.

Способ применения:

Поместить травмированный палец в шину-ортез. Зафиксировать фаланги, подогнув шину-ортез плотно к суставам пальца.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: дюралюминий.

Ортез на пястно-фаланговые суставы WFG-100

Назначение:

Фиксирует положение пальцев руки.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

Основой изделия является прочная шина с фиксирующими ремнями, которыми шина прикреплена к пальцам и запястью

Способ применения:

Пальцы разместить на шине. Зафиксировать пальцы и запястье на шине ремнями с застежками-липучками "Велкро".

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: нейлон, полиэстер, лайкра, поролон.

Ортез на пястно-фаланговые суставы WFG-100(P)

Назначение:

- фиксирует положение 2-4 пальцев.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- основой изделия является прочная шина с фиксирующими ремнями, которыми шина прикреплена к пальцам и запястью;
- ремни-фиксаторы позволяют регулировать давление при отеках.

Способ применения:

Надевается на лучезапястный сустав.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: нейлон, полиэстер, лайкра, поролон.

Ортез на пястно-фаланговый сустав WRS-305

Назначение:

- фиксирует первый пястно-фаланговый сустав в заданном металлической шиной положении.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- анатомически удобная, индивидуально изгибаемая алюминиевая шина;
- фиксирующий ремешок с удобной застежкой «Велкро», позволяющий закрепить ортез в правильном положении и отрегулировать давление на мягкие ткани запястья и кисти.

Способ применения:

Надевается на лучезапястный сустав.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: хайпалон, ССВ (соединение синтетических волокон), нейлон.

Ортез на пястно-фаланговый сустав WRS-305(P)

Назначение:

- обеспечивает сильную фиксацию лучезапястного, запястно-пястного и пястно-фалангового суставов первого пальца кисти;
- фиксирует первый пястно-фаланговый сустав в заданном положении;
- ограничение подвижности способствует снижению болевого синдрома.

• металлическая

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- анатомически удобная, индивидуально изгибаемая алюминиевая шина;
- фиксирующий ремень с удобной застежкой «Велкро», позволяющий закрепить ортез в правильном положении и отрегулировать давление на мягкие ткани запястья и кисти.

Способ применения:

Надевается на лучезапястный сустав.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: хайпалон, ССВ (соединение синтетических волокон), нейлон.

Корсет ортопедический BS-222

Назначение:

- выпрямление позвоночного столба и уменьшение выраженности кифоза за счет активации разгибателей спины;
- стимуляция работы околопозвоночных мышц через включение биологической обратной связи;
- уменьшение болевого синдрома и улучшение подвижности пациента.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- Простота корректировки позволяет подогнать тренажер-корректор индивидуально для каждого пациента.
- Система ремней, похожих на ремни рюкзака, отводит плечи назад, не мешая движениям в плечевом поясе и верхних конечностях и не ограничивая дыхательных движений грудной клетки и живота.

Способ применения:

Одевается лежа на спине.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- беременность
- диафрагмальные грыжи
- неврические грыжи брюшной стенки
- синдром портальной гипертензии.

Состав: полиэстер, спандекс, нейлон, поролон, хлопок.

Корсет ортопедический BS-224

Назначение:

- средняя степень фиксации поясничного отдела позвоночника;
- обеспечивает перераспределение нагрузки с патологического позвоночно-двигательного сегмента;
- компенсирует дефицит опорности;
- широкая передняя часть корсета с мягкой хлопковой подкладкой обеспечивает дополнительную компрессию передней брюшной стенки;
- оказывает микромассирующее воздействие в области прилегания корсета к коже туловища.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- эластичный пояс, усиленный 4 металлическими ребрами жесткости;
- 2 дополнительные эластичные затяжки с застежками «Велкро».

Способ применения:

Одевается лежа на спине, застегивается вначале эластичный пояс, затем ленты усиления.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: полиэстер, спандекс, нейлон, поролон, хлопок.

Корсет ортопедический DBS-4000

Назначение:

- средняя степень фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника;
- улучшение кровоснабжения и ускорение выздоровления.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- выполнен из современных материалов особого плетения по бесшовной технологии;
- корсет снабжен четырьмя металлическими ребрами жесткости и съемной массажной подушкой для лечебного воздействия на мышцы спины;
- специальная съемная массажная подушка в области поясницы выполняет постоянный лечебный массаж мышц, нервных окончаний и рефлексогенных зон.

Способ применения:

Одевается лежа на спине.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: нейлон, эластик, спандекс.

Корсет ортопедический DBS-4000(M)

Назначение:

- средняя степень фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника;
- улучшение кровоснабжения и ускорение выздоровления.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- выполнен из современных материалов особого плетения по бесшовной технологии;
- корсет снабжен четырьмя металлическими ребрами жесткости и съемной массажной подушкой для лечебного воздействия на мышцы спины;
- имеет специальную анатомическую форму и выпускаются в двух модификациях для мужского и женского типов фигуры, что обеспечивает оптимальную подстройку надетых изделий к изгибам тела и максимальный комфорт их использования;
- специальная съемная массажная подушка в области поясницы выполняет постоянный лечебный массаж мышц, нервных окончаний и рефлексогенных зон.

Способ применения:

Одевается лежа на спине.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- беременность
- диафрагмальные грыжи
- неврические грыжи брюшной стенки
- синдром портальной гипертензии.

Состав: нейлон, эластик, спандекс.

Корсет ортопедический DBS-4000(W)

Назначение:

- средняя степень фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника;
- улучшение кровоснабжения и ускорение выздоровления.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- выполнен из современных материалов особого плетения по бесшовной технологии;
- корсет снабжен четырьмя металлическими ребрами жесткости и съемной массажной подушкой для лечебного воздействия на мышцы спины;
- имеет специальную анатомическую форму и выпускаются в двух модификациях для мужского и женского типов фигуры, что обеспечивает оптимальную подстройку надетых изделий к изгибам тела и максимальный комфорт их использования;
- специальная съемная массажная подушка в области поясницы выполняет постоянный лечебный массаж мышц, нервных окончаний и рефлексогенных зон.

Способ применения:

Одевается лежа на спине.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- беременность
- диафрагмальные грыжи
- неврические грыжи брюшной стенки
- синдром портальной гипертензии.

Состав: нейлон, эластик, спандекс.

Корсет ортопедический DLSS-4000(F)

Назначение:

- переменная степень фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника;
- высокая лечебная эффективность обусловлена постоянной надежной фиксацией рамы и ребер жесткости в правильном положении;
- массажное воздействие на поясницу активно улучшает кровоснабжение и ускоряет выздоровление.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- выполнен из современных материалов особого плетения по бесшовной технологии;
- универсален, поскольку обеспечивает все степени фиксации (полная, сильная, средняя и легкая) благодаря комплекту из съемной жесткой пластиковой рамы и двух наборов металлических ребер жесткости различной толщины (по 4 ребра в наборе);
- специальная анатомическая форма обеспечивает максимальную подстройку надетого изделия к изгибам тела;
- высокая эластичность и проницаемость для воздуха.

Способ применения:

Одевается лежа на спине.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- беременность
- диафрагмальные грыжи
- невризмальные грыжи брюшной стенки
- синдром портальной гипертензии.

Состав: пейлон, эластик, спандекс.

Корсет ортопедический НЕВ-995

Назначение:

- обеспечивает фиксацию груднопоясничного отдела позвоночника с гиперэкстензией (переразгибанием).
- переносит нагрузки с тел позвонков на задние элементы (дуги, отростки), что способствует скорейшему сращиванию переломов, профилактике развития осложнений (формированию локальной кифотической деформации позвоночника в следствии возникновения клиновидности тела позвонка).

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- новая храповая застежка, легкая и безопасная в применении;
- динамическая адаптация к движениям тела;
- приятный для кожи материал делает использование корсета максимально комфортным.

Способ применения:

Корсет-гиперэкстензор надевается на пациента в положении лежа спине.

1. Установка ширины корсета - гиперэкстензора.
2. Регулировка верхнего угла.
3. Установка длины.
4. Регулировка нижнего угла.
5. Подготовка спинной панели.
6. Регулировка длины пояса.
7. Закрытие застёжки.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- нестабильные переломы позвонков поясничного и грудного отделов (независимо от наличия неврологических расстройств)
- при необходимости оперативного лечения.

Состав: алюминий, ПВХ, полиэстер, нейлон, полиуретановый поролон.

Корсет ортопедический НЕВ-997

1. Назначение

- сильная степень фиксации груднопоясничного отдела позвоночника в положении разгибания.

2. Основные технические характеристики

- легкая, прочная, износостойкая рама из алюминиевого сплава;
- наличие подвижной нижней (надлобковой) панели для удобства сидения, существенно увеличивающей комфорт длительного ношения корсета.

3. Противопоказания

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- нестабильные переломы позвонков поясничного и грудного отделов (независимо от наличия неврологических расстройств)
- при необходимости оперативного лечения

4. Подготовка к работе изделия

Корсет-гиперэкстензор надевается на пациента в положении лежа спине.

- Установка ширины корсета - гиперэкстензора.
- Установка длины.
- Подготовка спинной панели.
- Регулировка длины пояса.
- Закрытие застёжки.

5.Порядок работы изделия

Режим и сроки пользования определяет врач.

6.Правила хранения и использования

Хранить товар в закрытых транспортных коробках при комнатной температуре и влажности до 70 %. Защищать от непрямого и прямого воздействия солнечного или искусственного света.

7.Материал

Состав: алюминий, ПВХ, полиэстер, нейлон, полиуретановый поролон.

Корсет ортопедический НЕВ-998

Назначение:

- обеспечивает фиксацию грудного отдела позвоночника с гиперэкстензией (переразгибанием);
- переносит нагрузки с тел позвонков на задние элементы (дуги, отростки), что способствует скорейшему сращиванию переломов, профилактике развития осложнений.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- легкая, прочная, износостойкая рама из алюминиевого сплава;
- специальные панели (верхняя и нижняя) обеспечивают удобство при ходьбе.

Способ применения:

Корсет - гиперэкстензор надевается на пациента в положении лежа на спине.

Отрегулируйте с помощью винтов положение верхней и нижней панели так, чтобы нагрудная подушка располагалась на груди, а нижняя панель упиралась в лобковый симфиз.

Отрегулируйте корсет по ширине. Подготовьте к фиксации спинную панель. Отстегните застежку рычаг, отрегулируйте длину пояса и натяжение ремня с противоположной от застежки - фиксатора стороны таким образом, чтобы задняя панель располагалась по центру спины.

Зафиксируйте ремень, закройте застежку - фиксатор.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- нестабильные переломы позвонков поясничного и грудного отделов (независимо от наличия неврологических расстройств).

Состав: алюминий, ПВХ, полиэстер, нейлон, полиуретановый поролон.

Корсет ортопедический НЕВ-999

1.Назначение

Корсет - гиперэкстензор обеспечивает сильную фиксацию грудопоясничного отдела позвоночника в положении регулируемого разгибания; при необходимости позволяет изменять требуемый угол гиперэкстензии.

2. Основные технические характеристики

- легкая, прочная, износостойкая рама из алюминиевого сплава;
- возможность задавать необходимый угол гиперэкстензии (положение регулируемого разгибания).

3. Противопоказания

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- нестабильные переломы позвонков поясничного и грудного отделов (независимо от наличия неврологических расстройств)
- при необходимости оперативного лечения

4. Подготовка к работе изделия

Корсет-гиперэкстензор надевается на пациента в положении лежа спине.

1. Установка ширины корсета - гиперэкстензора.
2. Регулировка верхнего угла.
3. Установка длины.
4. Регулировка нижнего угла.
5. Подготовка спинной панели.
6. Регулировка длины пояса.
7. Закрытие застёжки.

5. Порядок работы изделия

Режим и сроки пользования определяет врач.

6. Правила хранения и использования

Хранить товар в закрытых транспортных коробках при комнатной температуре и влажности до 70 %. Защищать от прямого и косвенного воздействия солнечного или искусственного света.

7. Материал

Состав: алюминий, ПВХ, полиэстер, нейлон, полиуретановый поролон.

Корсет ортопедический НЕВ-999(Р)

Назначение:

- обеспечивает фиксацию грудопоясничного отдела позвоночника с гиперэкстензией (переразгибанием);
- переносит нагрузки с тел позвонков на задние элементы (дуги, отростки), что способствует скорейшему сращиванию переломов, профилактике развития осложнений.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- легкая, прочная, износостойкая рама из алюминиевого сплава;
- возможность задавать необходимый угол гиперэкстензии (положение регулируемого разгибания).

Способ применения:

Корсет-гиперэкстензор надевается на пациента в положении лежа спине.

1. Установка ширины корсета - гиперэкстензора.
2. Регулировка верхнего угла.
3. Установка длины.
4. Регулировка нижнего угла.
5. Подготовка спинной панели.
6. Регулировка длины пояса.
7. Закрытие застёжки.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания (в области применения бандажа);
- заболевания кожи (в области применения бандажа).

Состав: алюминий, ПВХ, полиэстер, нейлон, полиуретановый поролон.

Корсет ортопедический IBS-1004

Назначение:

- средняя степень фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника (ТН₁₀-S₂);
- корсет является облегченным вариантом модели Orlett® IBS-2004.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- выполнен из стандартной эластической сетки, обеспечивающей вентиляцию тела;
- усилен 2 металлическими ребрами жесткости;
- двумя эластичными затяжками с застёжками «Велкро», регулирующими натяжение корсета.

Способ применения:

Одевается лежа на спине (с захватом на 2-3 см гребней подвздошных костей).

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- беременность
- диафрагмальные грыжи
- невыправимые грыжи брюшной стенки
- синдром портальной гипертензии.

Состав: нейлон, спандекс, полиэстер, полиуретановый поролон, хлопок.

Корсет ортопедический IBS-2004

Назначение:

- средняя степень фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника (ТН₁₀-S₂);
- корсет является облегченным вариантом модели Orlett® IBS-3006.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- выполнен из стандартной эластической сетки, обеспечивающей вентиляцию тела;
- усилен 4 металлическими ребрами жесткости;
- двумя эластичными затяжками с застежками «Велкро», регулирующими натяжение корсета.

Способ применения:

Одевается лежа на спине (с захватом на 2-3см гребней подвздошных костей).

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- беременность
- диафрагмальные грыжи
- невосприимые грыжи брюшной стенки
- синдром портальной гипертензии.

Состав: нейлон, спандекс, полиэстер, полиуретановый поролон, хлопок.

Корсет ортопедический IBS-3006

Назначение:

- средняя степень фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника (ТН₁₀-S₂).

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- изготовлен из эластической сетки повышенной прочности, обеспечивающей вентиляцию тела;
- усилен в поясничной области 4-8 металлическими ребрами жесткости. Количество ребер жесткости (4, 6, 8) зависит от размера корсета;
- дополнительные упругие ребра в передней части корсета предотвращают его скручивание;
- оснащен двумя эластичными затяжками, регулирующими натяжение корсета;
- в комплекте широкие съемные регулируемые по длине подтяжки с застежками «Велкро».

Способ применения:

Одевается лежа на спине, вначале застегивается эластичный пояс с захватом на 2-3см гребней подвздошных костей.

Прикрепляются подтяжки, затем застегиваются ленты усиления.

Варианты крепления подтяжек:

- стандартный
- с легким реклинирующим эффектом - для улучшения осанки.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- беременность
- диафрагмальные грыжи
- неврические грыжи брюшной стенки
- синдром портальной гипертензии.

Состав: нейлон, спандекс, полиэстер, полиуретановый поролон, хлопок.

Корсет ортопедический LSO-981

1. Назначение

- полная степень фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника;
- стабилизация и разгрузка Th₉-S₃;
- применяется вместо тяжелых гипсовых корсетов при лечении травм позвоночника;
- абсолютно прозрачен для всех видов лучевой диагностики.

2. Основные технические характеристики

- легкая прочная пластиковая рама, при необходимости подлежит индивидуальной формовке после нагревания промышленным ручным феном (200-250°C);
- мягкая полифоам прокладка;
- поддерживающая вставка на животе;
- 6 регулируемых затяжек;
- застежки «Велкро».

3. Противопоказания

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- беременность
- диафрагмальные грыжи
- неврические грыжи брюшной стенки
- синдром портальной гипертензии

4. Подготовка к работе изделия

Одевается лежа на спине.

5. Порядок работы изделия

Режим и сроки пользования определяет врач.

6.Правила хранения и использования

Хранить товар в закрытых транспортных коробках при комнатной температуре и влажности до 70 %. Защищать от непрямого и прямого воздействия солнечного или искусственного света.

7.Материал

Состав: пластик

Корсет ортопедический LSO-991

1.Назначение

- полная степень фиксации грудопояснично-крестцового отдела позвоночника;
- стабилизация и разгрузка Th₈-S₂;
- применяется вместо тяжелых гипсовых корсетов при лечении травм позвоночника;
- абсолютно прозрачен для всех видов лучевой диагностики.

2.Основные технические характеристики

- легкая прочная пластиковая рама, при необходимости подлежит индивидуальной формовке после нагревания промышленным ручным феном (200-250°C);
- мягкая согревающая неопреновая прокладка;
- поддерживающая вставка на животе;
- 6 регулируемых затяжек и 2 регулируемые наплечные лямки;
- застежки «Велкро».

3.Противопоказания

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- беременность
- диафрагмальные грыжи
- неврические грыжи брюшной стенки
- синдром портальной гипертензии

4.Подготовка к работе изделия

Одевается лежа на спине.

5.Порядок работы изделия

Режим и сроки пользования определяет врач.

6.Правила хранения и использования

Хранить товар в закрытых транспортных коробках при комнатной температуре и влажности до 70 %. Защищать от непрямого и прямого воздействия солнечного или искусственного света.

7.Материал

Состав: пластик

Корсет ортопедический LSS-114

Назначение:

- Обеспечивает сильную степень фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника (Th12-S4) при заболеваниях, после травм и операций.
- Эффективен при сильных болях в пояснице на фоне радикулита.
- Незаменим для лечения спондилолистезов, межпозвонковых грыж и остеохондроза.
- Корсет ограничивает резкие движения, усиливающие боль, и позволяет сохранить подвижность во время обострения остеохондроза.
- Используют при прохождении курса мануальной терапии и лечебной гимнастики после каждого лечебного сеанса для сохранения достигнутого лечебного эффекта.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- прочное эластичное полотно
- четыре изогнутых металлических ребра жесткости
- четыре дополнительные эластичные затяжки
- ребра жесткости, предварительно изогнутые, могут подгоняться индивидуально.

Способ применения:

Одевается лежа на спине, вначале застегивается эластичный пояс, затем ленты усиления.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)

Состав: полиэстер, спандекс, хлопок, нейлон, полиуретановый поролон.

Корсет ортопедический для детей LSS-114(P)**Назначение:**

- Обеспечивает сильную степень фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника (Th12-S4) при заболеваниях, после травм и операций.
- Эффективен при сильных болях в пояснице на фоне радикулита.
- Незаменим для лечения спондилолистезов, межпозвонковых грыж и остеохондроза.
- Корсет ограничивает резкие движения, усиливающие боль, и позволяет сохранить подвижность во время обострения остеохондроза.
- Используют при прохождении курса мануальной терапии и лечебной гимнастики после каждого лечебного сеанса для сохранения достигнутого лечебного эффекта.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- прочное эластичное полотно
- четыре изогнутых металлических ребра жесткости
- четыре дополнительные эластичные затяжки
- ребра жесткости, предварительно изогнутые, могут подгоняться индивидуально.

Способ применения:

Одевается лежа на спине, вначале застегивается эластичный пояс, затем ленты усиления.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная переносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)

Состав: полиэстер, спандекс, хлопок, нейлон, полиуретановый поролон.

Корсет ортопедический LSS-124

Назначение:

- Фиксация позвоночника от нижнегрудного до крестцового отдела.
- Эффективен при сильных болях в пояснице на фоне радикулита.
- Незаменим для лечения сколиозов, межпозвоночных грыж и остеохондроза.
- Корсет ограничивает резкие движения, усиливающие боль, и позволяет сохранить подвижность во время обострения остеохондроза.
- Используют при прохождении курса мануальной терапии и лечебной гимнастики после каждого лечебного сеанса для сохранения достигнутого лечебного эффекта.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- Регулируемые стейсы вручную корректируются к индивидуальным особенностям.
- Натяжение эластичной ленты обеспечивает компрессию и улучшает поддержку, создаваемую ребрами жесткости.
- Эластичность основы, широкая липучка «Велкро» и анатомическая форма обеспечивают комфортное прилегание.

Способ применения:

Одевается лежа на спине, вначале застегивается эластичный пояс, затем ленты усиления.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- беременность
- диафрагмальные грыжи
- невраимые грыжи брюшной стенки
- синдром портальной гипертензии

Состав: полиэстер, спандекс, хлопок, нейлон, полиуретановый поролон.

Корсет ортопедический NLSS-156

Назначение:

- Обеспечивает среднюю степень фиксации позвоночника (ТН₁₂-S₂), стабилизирует и разгружает пораженный отдел позвоночника.
- Теплосберегающий эффект обеспечивает усиление кровообращения мышц и улучшение впитывания лекарственных средств.
- Оптimalен для применения в холодную и сырую погоду.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- корсет выполнен из неопрена;
- конструкция усилена 6 металлическими ребрами жесткости;
- 2 дополнительные эластичные затяжки с застежками "Велкро";
- специальная съемная подушка в области поясницы позволяет получить максимальное прилегание корсета к пояснице в случаях поясничного гиперлордоза.

Способ применения:

Одевается лежа на спине.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- беременность
- диафрагмальные грыжи
- невралимые грыжи брюшной стенки
- синдром портальной гипертензии.

Состав: неопрен, хлопок, нейлон.

Корсет ортопедический OBS-100

Назначение:

- фиксирует поясничный отдел позвоночника (ТН12-S2) в средней степени;
- стабилизирует связочно-суставной аппарат позвоночника;
- устраняет дисбаланс паравертебральных мышц в поясничном отделе;
- уменьшает нагрузку на мышцы поясницы;
- уменьшает нагрузку на позвоночно-двигательные сегменты;
- разгружает суставы и связочный аппарат позвонков;
- нормализует положение позвонков при смещениях.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

состоит из нерастяжимого каркаса и специальной технологичной динамичной системы, скрепляющей две эргономичные панели в положении проекции поперечных отростков поясничного отдела.

Способ применения:

Корсет следует надевать на нижнее белье. Пояс корсета располагается так, чтобы две пластиковые панели расположились симметрично относительно оси позвоночника. Застегнуть пояс с помощью застежек-липучек "Велкро". Затем подогнать с помощью системы динамической регулировки плотность прилегания корсета и степень фиксации.

Размер подбирается по объему талии.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)

- беременность
- диафрагмальные грыжи
- невправимые грыжи брюшной стенки
- синдром портальной гипертензии.

Состав: нейлон, полиэстер, хлопок.

Корсет ортопедический OBS-200

Назначение:

- фиксирует поясничный отдел позвоночника (Th12-S2) в средней степени;
- стабилизирует связочно-суставной аппарат позвоночника;
- устраняет дисбаланс паравертебральных мышц в поясничном отделе;
- уменьшает нагрузку на мышцы поясницы;
- уменьшает нагрузку на позвоночно-двигательные сегменты;
- разгружает суставы и связочный аппарат позвонков;
- нормализует положение позвонков при смещениях.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

состоит из нерастяжимого каркаса и специальной технологичной динамичной системы, скрепляющей две эргономичные панели в положении проекции поперечных отростков поясничного отдела.

Способ применения:

Корсет следует надевать на нижнее белье. Пояс корсета располагается так, чтобы две пластиковые панели расположились симметрично относительно оси позвоночника. Застегнуть пояс с помощью застежек-липучек "Велкро". Затем подогнать с помощью системы динамической регулировки плотность прилегания корсета и степень фиксации.

Размер подбирается по объему талии.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- беременность
- диафрагмальные грыжи
- невправимые грыжи брюшной стенки
- синдром портальной гипертензии.

Состав: нейлон, полиэстер, хлопок.

Корсет ортопедический OBS-300

Назначение:

- обеспечивает стабилизацию и разгрузку позвоночника на уровне Th9-S1;
- стабилизирует связочно-суставной аппарат;
- уменьшает нагрузки на позвоночно-двигательные сегменты.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

состоит неразъемного каркаса и специальной технологичной динамичной системы, скрепляющей две эргономичные панели в положении проекции поперечных отростков грудопоясничного отдела.

Способ применения:

Корсет следует надевать на нижнее белье.

Пояс корсета располагается так, чтобы корсет плотно прилегал к гребням подвздошных костей. Эргономичные пластиковые панели должны располагаться симметрично относительно оси позвоночника

Закрепить корсет спереди с помощью застежек-липучек "Велкро".

Отрегулировать с помощью динамической системы регулировки плотность прилегания корсета и степень фиксации.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- беременность
- диафрагмальные грыжи
- невризмальные грыжи брюшной стенки
- синдром портальной гипертензии.

Состав: нейлон, полиэстер, хлопок.

Корректор осанки TLSO-250(A)

Назначение:

- лечение нарушений осанки и искривлений грудопоясничного отдела позвоночника;
- лечение травм грудопоясничного отдела позвоночника;
- профилактика переломов при остеопорозе;
- реабилитация после операций на грудном и поясничном отделах позвоночника;
- лечение остеохондроза, остеохондропатии;
- профилактика нарушений осанки;
- коррекция нарушений осанки и деформаций позвоночника;
- фиксация достигнутой коррекции;
- разгрузка грудопоясничного отдела позвоночника.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- эластичный поясничный пояс;
- спинка из прочного полотна;
- 2 ребра жесткости из сплава на основе алюминия, толщиной 1,5 мм.
- 2 неразъемные лямки с застежками «Велкро», натяжение которых регулирует степень отведения плеч и разгибания грудного отдела позвоночника.

Способ применения:

Поясничный бандаж одевается лежа, затем в вертикальном положении регулируются наплечные лямки, которые застегиваются на пояс.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- беременность
- диафрагмальные грыжи
- невправимые грыжи брюшной стенки
- синдром портальной гипертензии.

Состав: полиэстер, хлопок, спандекс, полипропилен, полиуретановый поролон, нейлон.

Корректор осанки TLSO-250(P)

Назначение:

- лечение нарушений осанки и искривлений груднопоясничного отдела позвоночника;
- лечение травм груднопоясничного отдела позвоночника;
- профилактика переломов при остеопорозе;
- реабилитация после операций на грудном и поясничном отделах позвоночника;
- лечение остеохондроза, остеохондропатии;
- профилактика нарушений осанки;
- коррекция нарушений осанки и деформаций позвоночника;
- фиксация достигнутой коррекции;
- разгрузка груднопоясничного отдела позвоночника.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- эластичный поясничный пояс;
- спинка из прочного полотна;
- 2 ребра жесткости из сплава на основе алюминия, толщиной 1,5 мм.
- 2 нерастяжимые лямки с застежками «Велкро», натяжение которых регулирует степень отведения плеч и разгибания грудного отдела позвоночника.

Способ применения:

Поясничный бандаж одевается лежа, затем в вертикальном положении регулируются наплечные лямки, которые застегиваются на пояс.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- беременность
- диафрагмальные грыжи
- невправимые грыжи брюшной стенки
- синдром портальной гипертензии.

Состав: полиэстер, хлопок, спандекс, полипропилен, полиуретановый поролон, нейлон.

Корректор осанки TLSO-251(F)

Назначение:

- лечение нарушений осанки и искривлений груднопоясничного отдела позвоночника;
- лечение травм груднопоясничного отдела позвоночника;
- профилактика переломов при остеопорозе;
- реабилитация после операций на грудном и поясничном отделах позвоночника;
- лечение остеохондроза, остеохондропатии;
- профилактика нарушений осанки;
- коррекция нарушений осанки и деформаций позвоночника;
- фиксация достигнутой коррекции;
- разгрузка груднопоясничного отдела позвоночника.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- эластичный поясничный пояс;
- спинка из прочного полотна;
- 2 ребра жесткости из сплава на основе алюминия, толщиной 2,5 мм. Ребра жесткости корректоров осанки Orlett® маркированы: верхние концы с белыми наконечниками, нижние – с черными;
- 2 эластичные затяжки, позволяющие регулировать степень фиксации поясницы;
- 2 нерастяжимые лямки с застежками «Велкро», натяжение которых регулирует степень отведения плеч и разгибания грудного отдела позвоночника.

Способ применения:

Поясничный бандаж одевается лежа, затем в вертикальном положении регулируются наплечные лямки, которые застегиваются на пояс.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- беременность
- диафрагмальные грыжи
- невризмальные грыжи брюшной стенки
- синдром портальной гипертензии.

Состав: полиэстер, хлопок, спандекс, полипропилен, полиуретановый поролон, нейлон.

Корректоры осанки TLSO-360(A), TLSO-360(P), TLSO-361(F)

Назначение:

- лечение нарушений осанки и искривлений груднопоясничного отдела позвоночника;
- лечение травм груднопоясничного отдела позвоночника;
- профилактика переломов при остеопорозе;
- реабилитация после операций на грудном и поясничном отделах позвоночника;
- лечение остеохондроза, остеохондропатии;
- профилактика нарушений осанки;
- коррекция нарушений осанки и деформаций позвоночника;
- фиксация достигнутой коррекции;
- разгрузка груднопоясничного отдела позвоночника.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- эластичный поясничный пояс;
- спинка из прочного полотна;
- 2 ребра жесткости из сплава на основе алюминия, толщиной 2,5 мм. Ребра жесткости корректоров осанки Orlett® маркированы: верхние концы с белыми наконечниками, нижние – с черными;
- 2 эластичные затяжки, позволяющие регулировать степень фиксации поясницы;
- 2 нерастяжимые лямки с застежками «Велкро», натяжение которых регулирует степень отведения плеч и разгибания грудного отдела позвоночника.

Способ применения:

Поясничная бандаж одевается лежа, затем в вертикальном положении регулируются наплечные лямки, которые застегиваются на пояс.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)
- беременность
- диафрагмальные грыжи
- невосправимые грыжи брюшной стенки
- синдром портальной гипертензии.

Состав: полиэстер, хлопок, спандекс, полипропилен, полиуретановый поролон, нейлон.

Реклинатор CS-150

Назначение:

- перераспределяет нагрузки с патологического позвоночно-двигательного сегмента;
- обеспечивает разведение пояса верхних конечностей, мягкую реклинацию и разгрузку тел позвонков верхне-грудного отдела позвоночника с сохранением и восстановлением нормального тонуса мышц;
- формирует стереотип правильной осанки.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

Реклинатор состоит из круглого межлопаточного пелота и двух наплечных лент с мягкими накладками и застежкой «Велкро».

Способ применения:

Надевают непосредственно на тело или на хлопчатобумажное белье. Круглый пелот накладывается на межлопаточную область, к которому крепятся наплечные ленты в положении разведения плеч.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)

Состав: пайлон, полиэстер, неопрен, хлопок, спандекс.

Реклинатор CS-160

Назначение:

- Формирование правильной осанки у детей и взрослых.
- Удержание позвоночника в физиологическом положении ("дисциплинирующее" действие раздел без развития мышечной гипотрофии).
- Разгрузка передних отделов тел позвонков.
- Устранение болевого синдрома.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- Корректор осанки имеет тонкий и легкий дизайн, не заметен под одеждой.
- Две эластичные пружинные шины поддерживают форму изделия сзади и обеспечивают его плотное прилегание к спине.
- Застегивается спереди с помощью износостойких застежек «Велкро».

Способ применения:

Надевают непосредственно на тело или на хлопчатобумажное белье. Размер подбирается по размеру одежды.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная переносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)

Состав: нейлон, полиэстер, неопрен, хлопок, спандекс.

Реклинатор CS-160(P)

Назначение:

- Формирование правильной осанки у детей.
- Удержание позвоночника в физиологическом положении ("дисциплинирующее" действие раздел без развития мышечной гипотрофии).

- Разгрузка передних отделов тел позвонков.

- Устранение болевого синдрома.

Особые свойства изделия, специфические характеристики, присущие только этому изделию:

- Корректор осанки имеет тонкий и легкий дизайн, не заметен под одеждой.

- Две эластичные пружинные шины поддерживают форму изделия сзади и обеспечивают его плотное прилегание к спине.

- Застегивается спереди с помощью износостойких застежек «Велкро».

Способ применения:

Надевают непосредственно на тело или на хлопчатобумажное белье. Размер подбирается по размеру одежды.

Ограничения и противопоказания:

- индивидуальная непереносимость материалов
- гнойные заболевания (в области применения бандажа)
- заболевания кожи (в области применения бандажа)

Состав: нейлон, полиэстер, неопрен, хлопок, спандекс.

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО.
ПРОШУЮЩАЯ И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
19 ЛИСТА (ОВ)

