



ООО «Алкон Фармацевтика»
Юридический адрес:
125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3
Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720
ОГРН 1027739129857
ИНН 7709354370
КПП 774301001

УТВЕРЖДАЮ
Менеджер по регистрации медицинских изделий
ООО «Алкон Фармацевтика»
Волкова Д.О.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная Clareon Vivity расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, предустановленная в автоматизированное устройство имплантации AutonoMe в различных вариантах исполнения:

1. Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная Clareon Vivity расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, предустановленная в автоматизированное устройство имплантации AutonoMe, модель CNAET0, оптическая сила от +10,0 до +25,0 диоптрий (с шагом 0,5 диоптрии), в составе:
 - Лоток с устройством AutonoMe, предзагруженным линзой – 1 шт.
 - Имплантационная регистрационная карта – 1 шт. (при необходимости);
 - Карточка имплантата пациента – 1 шт.;
 - Комплект стикеров с информацией об используемой линзе – 1 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт. (при необходимости);
 - Карта со ссылкой на инструкцию по применению в электронном виде – 1 шт.
2. Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая Clareon Vivity Toric расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, предустановленная в автоматизированное устройство имплантации AutonoMe, модели CNAET2, CNAET3 (оптическая сила от + 10,0 до +25,0 диоптрий, с шагом 0,5 диоптрии), CNAET4, CNAET5, CNAET6 (оптическая сила от + 10,0 до +21,0 диоптрий, с шагом 0,5 диоптрии), в составе:
 - Лоток с устройством AutonoMe, предзагруженным линзой – 1 шт.
 - Имплантационная регистрационная карта – 1 шт. (при необходимости);
 - Карточка имплантата пациента – 1 шт.;
 - Комплект стикеров с информацией об используемой линзе – 1 шт.;
 - Инструкция по применению – 1 шт. (при необходимости);
 - Карта со ссылкой на инструкцию по применению в электронном виде – 1 шт.

Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная Clareon Vivity расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, предустановленная в автоматизированное устройство имплантации AutonoMe, модель CNAET0, оптическая сила от +10,0 до +25,0 диоптрий (с шагом 0,5 диоптрий)



Clareon Vivity™

EXTENDED VISION HYDROPHOBIC IOL

with the
AutonoMe™
automated pre-loaded delivery system




SRK/T Optical A-Constant: 119.2
SRK/T Ultrasound A-Constant: 118.8



CE 0123

2021-02-17

MADE IN IRELAND
VER. 2.0

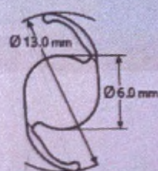

UDI



GTIN

00380652406307






(01)00380652406307(17)230216(21)25128709040(30)1

- | | | | |
|----|--|----|---|
| bg | Заднокамерна вътреочна леща, псевдофакична | it | Lente intraoculare da camera posteriore, pseudofachica |
| cs | Nitrooční čočka pro zadní komoru, pseudofakická | it | Užpakalines kameros intraokulinis lęsis, pseudofakinis |
| da | Intraokulær linse til bageste kammer, pseudofakisk | lv | Mugurējās kameras intraokulāra lēca, pseidofakiska |
| de | Hinterkammer-Intraokularlinse, pseudophak | nl | Achterste oogkamer intraoculaire lens, pseudofaak |
| el | Ενδοφθαλμιοί φακοί οπισθίου θαλάμου, ψευδοφακικοί | no | Intraokulær linse for bakre kammer, pseudofakisk |
| en | Posterior-chamber Intraocular lens, pseudophakic | pl | Tylnokomorowa soczewka wewnątrzgałkowa, pseudofakijna |
| es | Lente intraocular de cámara posterior, pseudofáquica | pt | Lente intraocular de câmara posterior, pseudofáquica |
| et | Tagakambri intraokulaarne lääts, pseudofaakiline | ro | Lentilă intraoculară pentru camera posterioară, pseudofachică |
| fr | Lentilles intra-oculaires de chambre postérieure, pseudophaque | sk | Šošovka vnútroočná zadnokomorová, pseudofakická |
| hu | Hátsó csarnokba beültethető műlencse, pszeudofák szemekhez | sv | Intraokulär lins för bakre kammare, pseudofakisk |



Лоток с устройством AutoNoMe, предзагруженным линзой

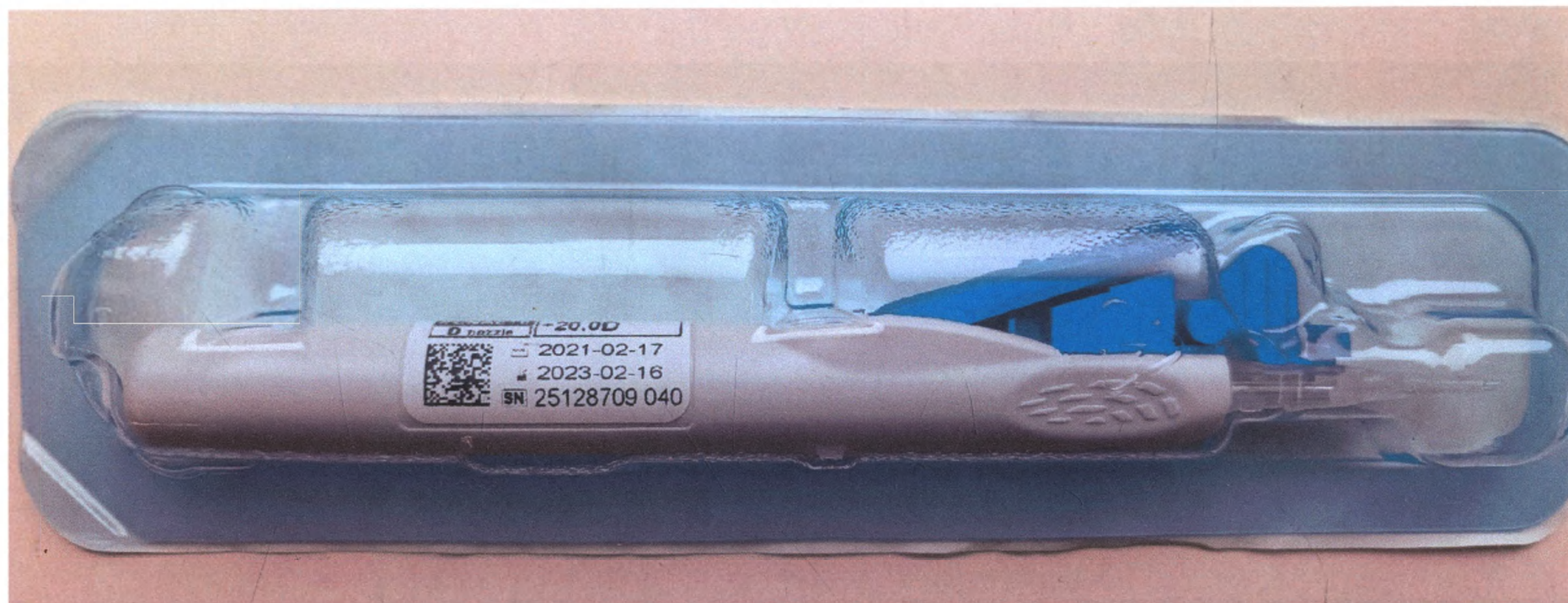

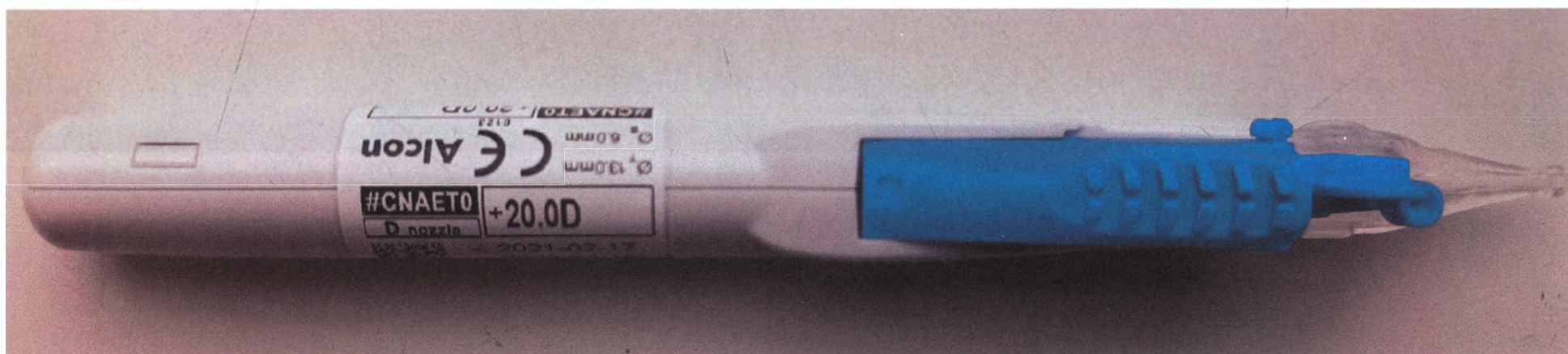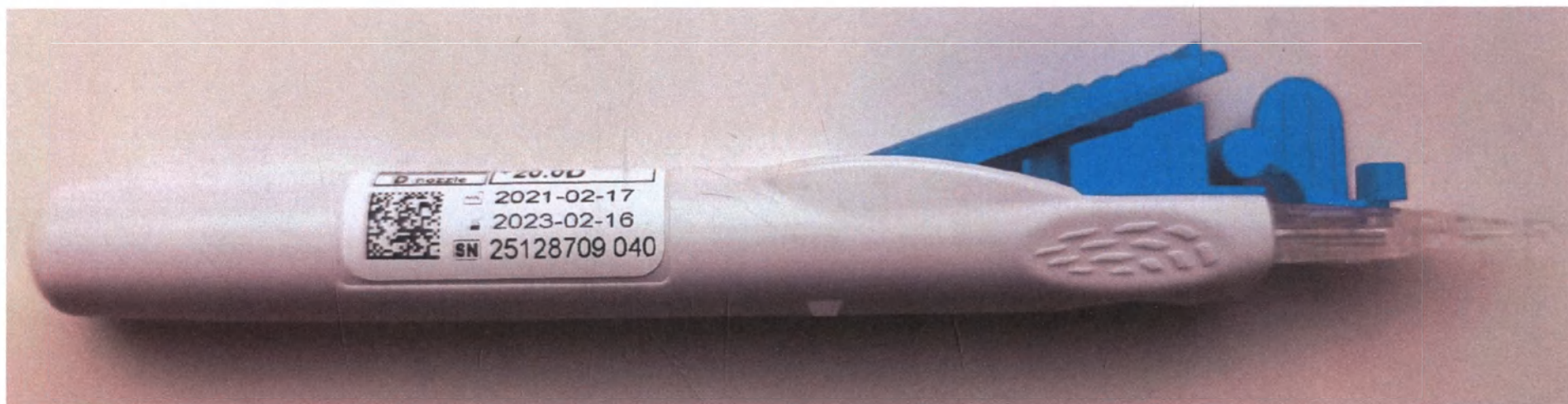





[illegible]

PATIENT INFORMATION															IMPLANTING PHYSICIAN																		
Last Name															Last Name																		
First Name/ M.I.															First Name/ M.I.																		
Surgery Date	M			O			D			A			Y			R			State License #														
RETURN COMPLETED FORM IN PROVIDED POSTAGE PAID ENVELOPE															Billing P.O. #																		

Комплект стикеров с информацией об используемой линзе

#CNAETO D nozzle

+20.0D

Clareon Vivity™ IOL

GTIN 00380652406307

UDI

UV & BLUE LIGHT FILTER

2023-02-16

Alcon

REF CNAETO.200

SN 25128709 040

Ø 13.0mm

Ø 6.0mm

#CNAETO D nozzle

+20.0D

Clareon Vivity™ IOL

GTIN 00380652406307

UDI

UV & BLUE LIGHT FILTER

2023-02-16

Alcon

SN (D1)00380652

Ø 13.0mm

Ø 6.0mm

#CNAETO D nozzle

+20.0D

Clareon Vivity™ IOL

GTIN 00380652406307

UDI

UV & BLUE LIGHT FILTER

2023-02-16

Alcon

REF CNAETO.200

SN 25128709 040

Ø 13.0mm

Ø 6.0mm

#CNAETO D nozzle

+20.0D

Clareon Vivity™ IOL

GTIN 00380652406307

UDI

UV & BLUE LIGHT FILTER

2023-02-16

Alcon

SN 25128709 C40

Ø 13.0mm

Ø 6.0mm

#CNAETO D nozzle

+20.0D

Clareon Vivity™ IOL

GTIN 00380652406307

UDI

UV & BLUE LIGHT FILTER

2023-02-16

Alcon

REF CNAETO.200

SN 25128709 040

Ø 13.0mm

Ø 6.0mm

#CNAETO D nozzle

+20.0D

Clareon Vivity™ IOL

GTIN 00380652406307

UDI

UV & BLUE LIGHT FILTER

2023-02-16

Alcon

SN 25128709 040

Ø 13.0mm

Ø 6.0mm

#CNAETO D nozzle

+20.0D

Clareon Vivity™ IOL

GTIN 00380652406307

UDI

UV & BLUE LIGHT FILTER

2023-02-16

Alcon

REF CNAETO.200

SN 25128709 040

Ø 13.0mm

Ø 6.0mm

L R

AFFIX TO IMPLANT CARD

#CNAETO D nozzle

+20.0D

Clareon Vivity™ IOL

GTIN 00380652406307

UDI

UV & BLUE LIGHT FILTER

2023-02-16

Alcon

SN 25128709 040

Ø 13.0mm

Ø 6.0mm

#CNAETO +20.0D

SN 25128709 040

#CNAETO +20.0D

SN 25128709 040

**ДАННУЮ ВЕРСИЮ ИНСТРУКЦИИ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная Clareon Vivity расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, предустановленная в автоматизированное устройство имплантации AutonoMe, модель CNAET0, оптическая сила от +10,0 до +25,0 диоптрий (с шагом 0,5 диоптрий).

в составе:

- Лоток с устройством AutonoMe, предзагруженным линзой – 1 шт.;
- Имплантационная регистрационная карта – 1 шт. (при необходимости);
- Карточка имплантата пациента – 1 шт.
- Комплект стикеров с информацией об используемой линзе – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Карта со ссылкой на инструкцию по применению в электронном виде – 1 шт.

ОПИСАНИЕ

Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная заднекамерная Clareon Vivity расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE (именуемая далее ИОЛ Clareon Vivity, модель CNVET0) поставляется предустановленной в автоматизированное устройство имплантации AutonoMe (именуемое далее устройство имплантации AutonoMe, модель CNAET0), что обеспечивает удобную и контролируемую имплантацию ИОЛ в капсульный мешок. ИОЛ Clareon Vivity — это гибкие интраокулярные линзы (ИОЛ) с УФ-фильтром и фильтром синего света. По сравнению с монофокальной ИОЛ, данная ИОЛ обеспечивает расширенный диапазон зрения на расстояниях от дальнего до ближнего, при этом для нее не характерна повышенная частота развития нарушений зрения. Моноблочная конструкция изготовлена из мягкого гидрофобного акрила с высоким рефракционным индексом и содержанием запатентованного хромофора, фильтрующего синий свет аналогично хрусталику глаза человека в диапазоне длин волны от 400 до 475 нм (Boettner and Wolter, 1982). В дополнение к стандартному фильтру УФ-излучения, хромофор, фильтрующий синий свет, снижает пропускание длин волны синего света. Двояковыпуклая асферическая оптическая часть изготавливается из мягкого акрилового материала с высоким рефракционным индексом, что позволяет сложить линзу перед введением и ввести ее через разрез меньшего размера, чем диаметр оптической части линзы. После имплантации в глаз линза аккуратно расправляется и восстанавливает свои оптические характеристики. Поддерживающие гаптические элементы обеспечивают правильное расположение и фиксацию оптической части ИОЛ внутри глаза.

Расширенная глубина резкости и профиль зрительных нарушений, характерный для монофокальной линзы, достигаются за счет запатентованной технологии коррекции волнового фронта X-WAVE на передней поверхности ИОЛ. Как в монофокальной ИОЛ, технология коррекции волнового фронта X-WAVE использует практически всю передаваемую световую энергию в зрительном диапазоне. Расположение технологии коррекции волнового фронта X-WAVE идентично у линз любой оптической силы. Передняя поверхность ИОЛ Clareon Vivity создана с отрицательной сферической аберрацией для компенсации положительной сферической аберрации роговицы.

Автоматизированное устройство имплантации ИОЛ AutonoMe представляет собой одноразовое устройство для хранения линзы и инъекторное устройство для ее имплантации. Данное изделие поставляется в полностью собранном виде с ИОЛ, помещенной в отсек для линзы. Устройство имеет рычаг управления скоростью имплантации ИОЛ, который позволяет выполнять ее имплантацию одной рукой. Продвижение ИОЛ осуществляется под действием внутреннего баллончика со сжатым газом, который позволяет контролировать скорость продвижения инъектора путем изменения силы нажатия на рычаг управления скоростью имплантации ИОЛ. Технические характеристики и схематичное изображение данной линзы и устройства для имплантации представлены в таблице 1, а также на рисунках 1, 2 и 3.

00002915 Rev. 01

ALCON IOLs

ELECTRONIC INSTRUCTIONS FOR USE

REFERENCE CARD



Alcon

www.ifu.alcon.com

ENGLISH

To access Instructions for Use:

1. Go to www.ifu.alcon.com
2. Search by product name or model number

Refer to back page for paper copy requests, to be supplied within 7 days. If country not listed, please dial +31 20 794 7071.

DUTCH

Voor toegang tot de gebruiksinstructies:

1. Ga naar www.ifu.alcon.com
2. Zoek op productnaam of modelnummer

Zie achterzijde voor aanvraag van een papieren kopie, die binnen 7 dagen geleverd wordt. Indien uw land niet vermeld wordt, kunt u bellen naar het nummer +31 20 794 7071.

HRVATSKI

Za pristup uputama za upotrebu:

1. Idite na www.ifu.alcon.com
2. Pretražite po nazivu proizvoda ili broju modela

Pogledajte zadnju stranicu za zahtjev papirne kopije, biti će dostavljena unutar 7 dana. Ukoliko zemlja nije navedena, molimo nazovite +31 20 794 7071.

ČEŠTINA

Přístup k návodům k použití:

1. Přejít na tento odkaz www.ifu.alcon.com
2. Vyhledat podle názvu výrobku nebo čísla modelu

Pokud požádáte papírovou kopii návodu k použití, použijte kontakt na zadní straně. Kopie Vám bude zaslána do 7 dní. Pokud země není uvedena, prosím volejte +31 20 794 7071.

EESTI

Kasutusjuhendi leidmiseks:

1. Mine www.ifu.alcon.com
2. Otsi toote nime või mudeli numbril järgi

Vahetähtaegselt, mis toimetatakse 7 päeva jooksul, päringu info lehte saaduselt küsige. Kui riiki ei ole loetletud, palun valige +31 20 794 7071.

ÍSLAND

Til að fágist notunarleiðbeiningar:

1. Opnaðu www.ifu.alcon.com
2. Leitaðu eftir vöruheimi eða gerðarnúmeri

Ábakiðum: mi finna upplýsingar til að hjálpa um leiðbeiningar á pappír, sem verða afhentar innan sjö daga. Ef landið er ekki á skráð skalt hringja í síma +31 20 794 7071.

DANSK

Hier finder du brugsanvisning:

1. Gå til www.ifu.alcon.com
2. Søg på produktnavn eller modelnummer

Se bagveden for bestilling af papirkopier, som fremsendes inden for 7 dage. Hvis dit land ikke fremgår, bedes du ringe: +31 20 794 7071.

ESPAÑOL

Para acceder a las instrucciones de uso:

1. Ir a www.ifu.alcon.com
2. Buscar por nombre del producto o por el modelo

Fase solicitar una copia en papel, consultará el reverso de la página. Las copias se entregarán en un plazo de 7 días. Si su país no aparece en el listado, por favor, llamar al +31 20 794 7071.

ITALIANO

Per accedere alle istruzioni per l'uso:

1. Andare sul sito www.ifu.alcon.com
2. Cercare per nome prodotto o codice prodotto

In fondo alla pagina trovi le istruzioni per richiedere una copia cartacea, che sarà fornita entro 7 giorni. Nel caso in cui il Paese non sia presente nell'elenco, si prega di contattare: +31 20 794 7071.

DEUTSCH

Um Gebrauchsanweisungen zu erhalten:

1. Gehen Sie auf die Seite www.ifu.alcon.com
2. Suchen Sie nach Produktname oder Modellnummer

Für die Anforderung einer Papierversion, die Ihnen innerhalb von 7 Tagen zugestellt wird, siehe Rückseite. Falls Ihr Land nicht aufgeführt ist, wählen Sie bitte +31 20 794 7071.

FRANÇAIS

Pour accéder aux instructions d'utilisation:

1. Allez sur le site www.ifu.alcon.com
2. Rechercher par nom de produit ou numéro de modèle

Reportez-vous à la dernière page pour les démarches de copie papier. À fournir dans les 7 jours. Si le pays ne figure pas dans la liste, veuillez composer le +31 20 794 7071.

ҚАЗАҚ

Пайдалану жөніндегі нұсқауларды қалай жеткізу үшін:

1. www.ifu.alcon.com сайты
2. Өнім атауы немесе үлгі нөмірі бойынша іздеуді пайдалануыңыз

Қағаз нұсқасын алу үшін сайт бетінің жазбалық сағасы бетке жүгізіңіз, нұсқаулар 7 күн ішінде ұсынылады. Егер ел атауы көрсетілмеген, +31 20 794 7071 нөмірімен қатысуыңыз керек.

Argentina: +800 135 79 135
Australia: +800 135 79 135
Belgium: +800 135 79 135
Brazil: 0800 591 1055
Canada: +1 855 805 8539
Czech Republic: +800 135 79 135
Chile: +31 20 794 7071
Colombia: +800 135 79 135
Cyprus: +800 135 79 135

Danmark: +800 135 79 135
Deutschland: +800 135 79 135
Ecuador: +31 20 794 7071
España: +800 135 79 135
Eesti: 0800 0100567
France: +800 135 79 135
Hrvatska: 0800 804 804
Ireland: +800 135 79 135
Island: 800 8996

Italia: +800 135 79 135
Latvija: +800 135 79 135
Liechtenstein: +31 20 796 5692
Lietuva: 8800 30728
Luxembourg: +800 135 79 135
Magyarország: +800 135 79 135
Nederland: +800 135 79 135
New Zealand: +800 135 79 135
Norge: +800 135 79 135

Österreich: +800 135 79 135
Polska: +800 135 79 135
Portugal: +800 135 79 135
România: 0800 895 084
Singapore: 800 101 3366
Slovakia: 0800 606 287
Slovenija: +800 135 79 135
Suomi: +800 135 79 135
Sverige: +800 135 79 135

Switzerland: +800 135 79 135
Türkiye: 0800 142 064 866
United Kingdom: 0800 135 79 135
United States: +1 855 236 0910
Viet Nam: 122 80297
Україна: +800 135 79 135
Россия: +800 135 79 135
Ελλάδα: 0800 161 2205 7799
All Other Countries: +31 20 794 7071





Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2999 USA © 2019, 2021 Alcon Inc.



300029215

Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая Clareon Vivity Toric расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, предустановленная в автоматизированное устройство имплантации AutonoMe, модель CNAET2

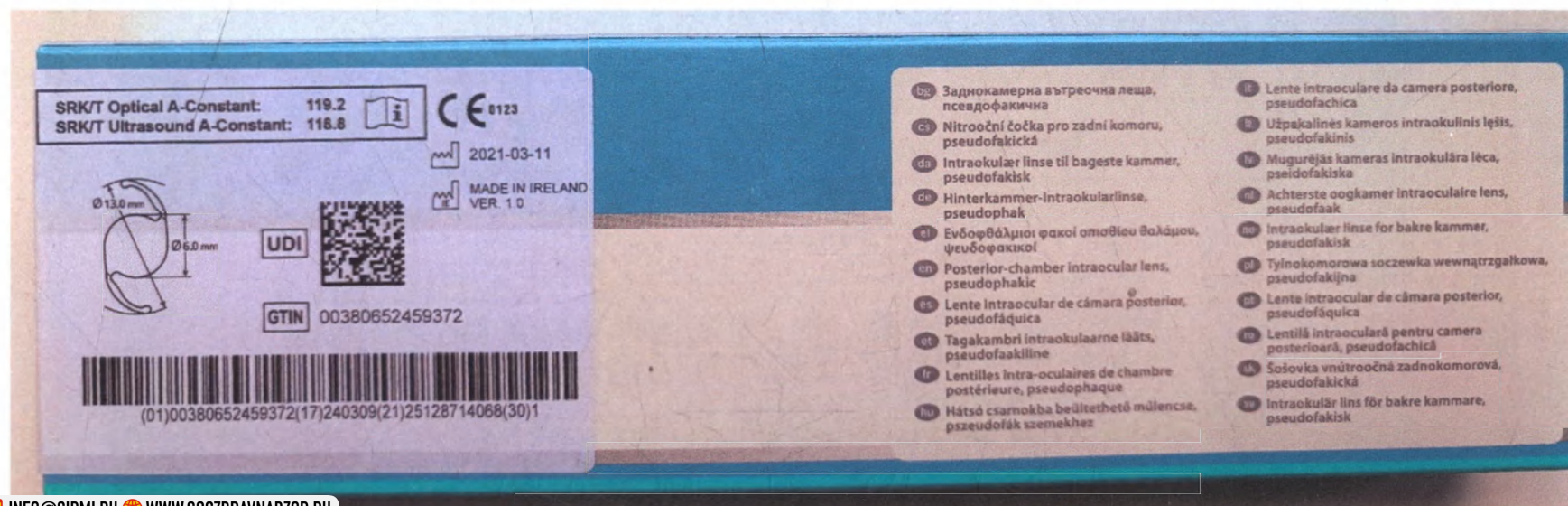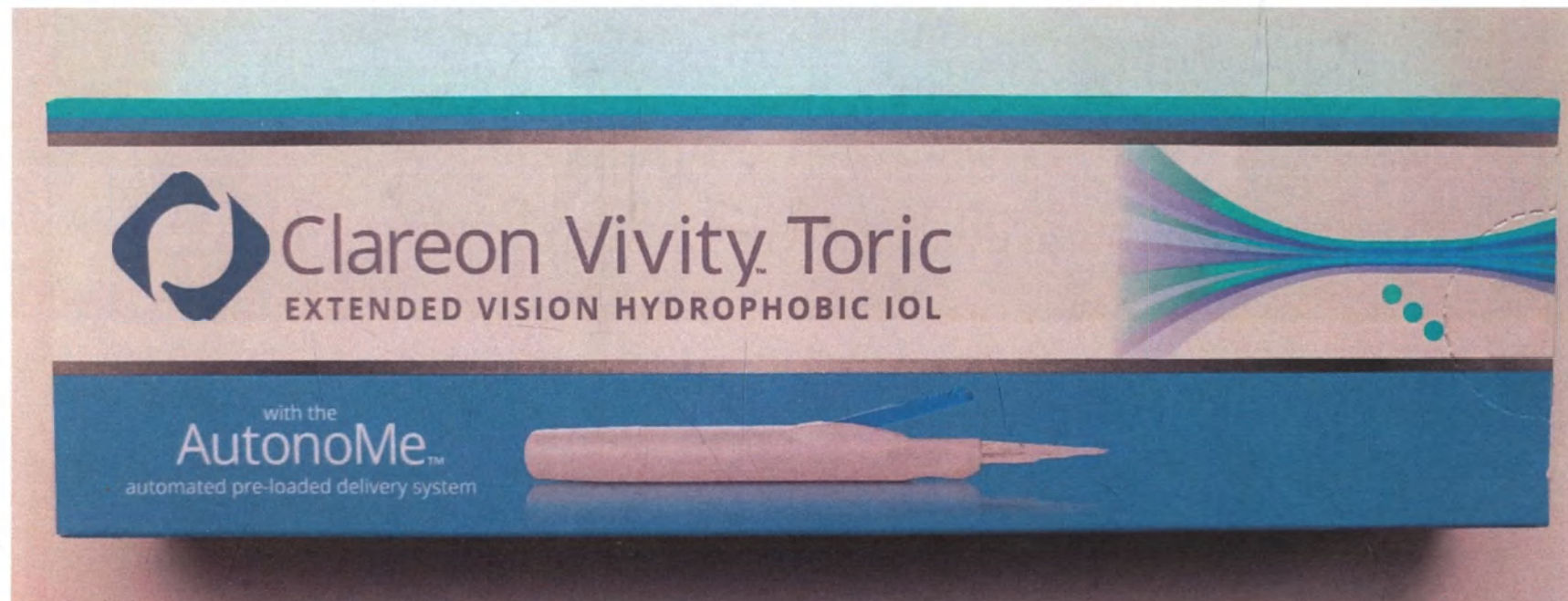

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099 USA

EC REP

Alcon Laboratoires Belgium
Lichtenveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgium



www.ifu.alcon.com

1 x STERILEEO

POSTERIOR
CHAMBER
IOL



Not made with
natural rubber latex

59°F
15°C

86°F
30°C

MD

RFID

Does not
contain phthalates

Alcon

Clareon Vivity™ Toric IOL

CNAET2

+20.0D CYL 1.00

D nozzle




UV &
BLUE
LIGHT
FILTER




SN 25128714 068 2024-03-09


Alcon

Лоток с устройством AutonoMe, предзагруженной линзой

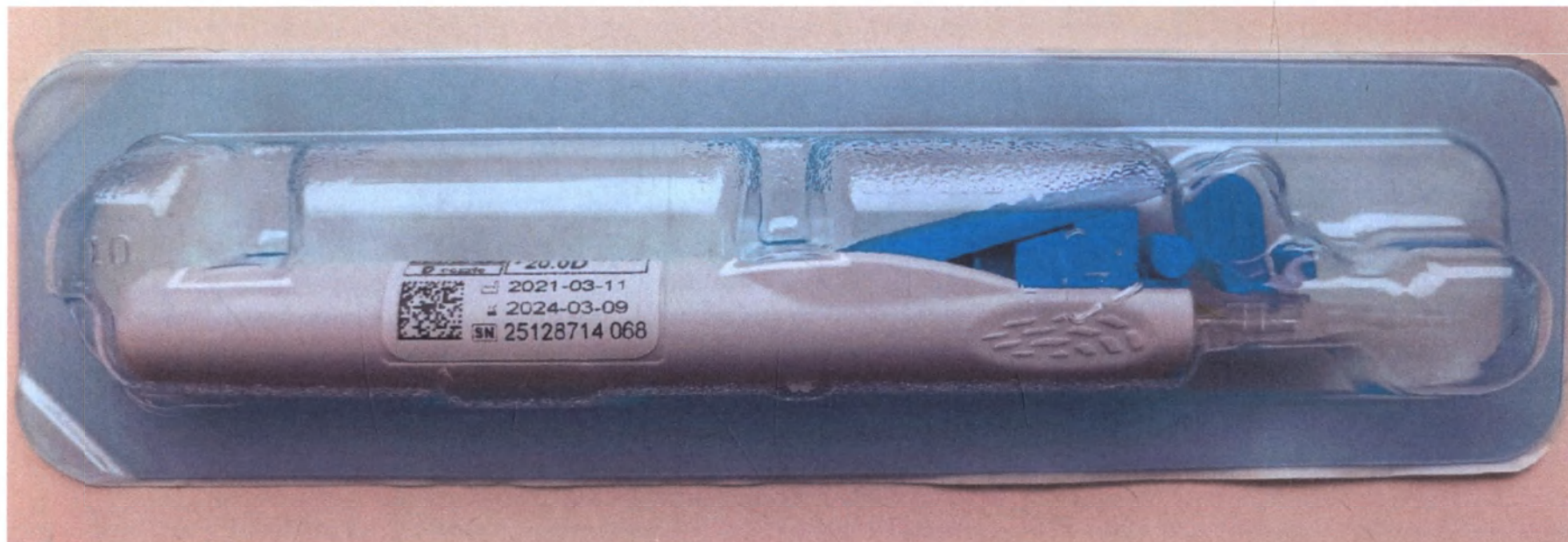

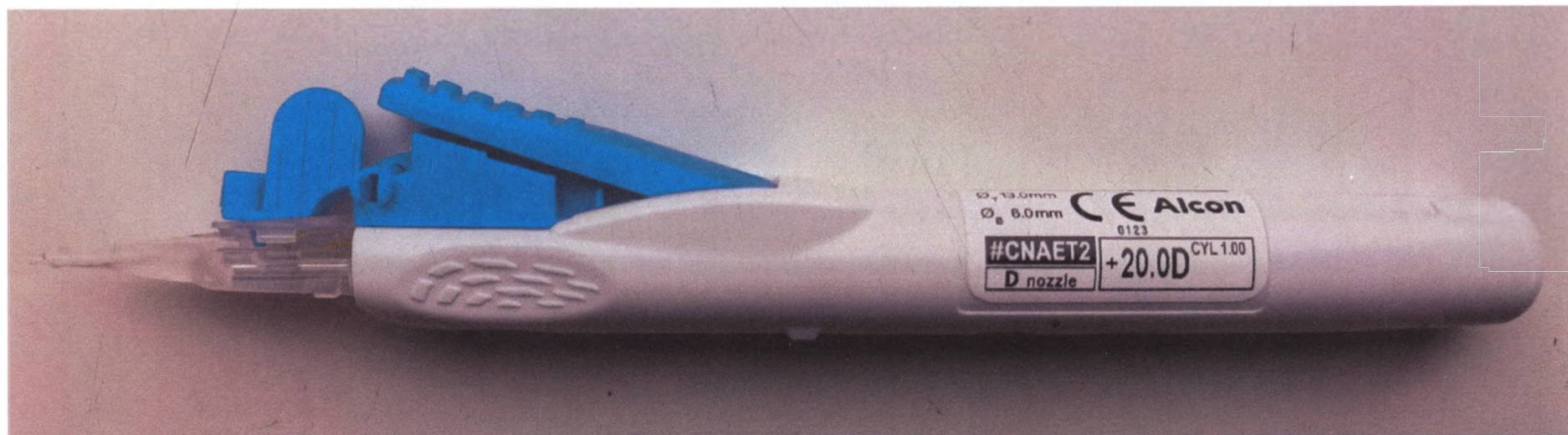



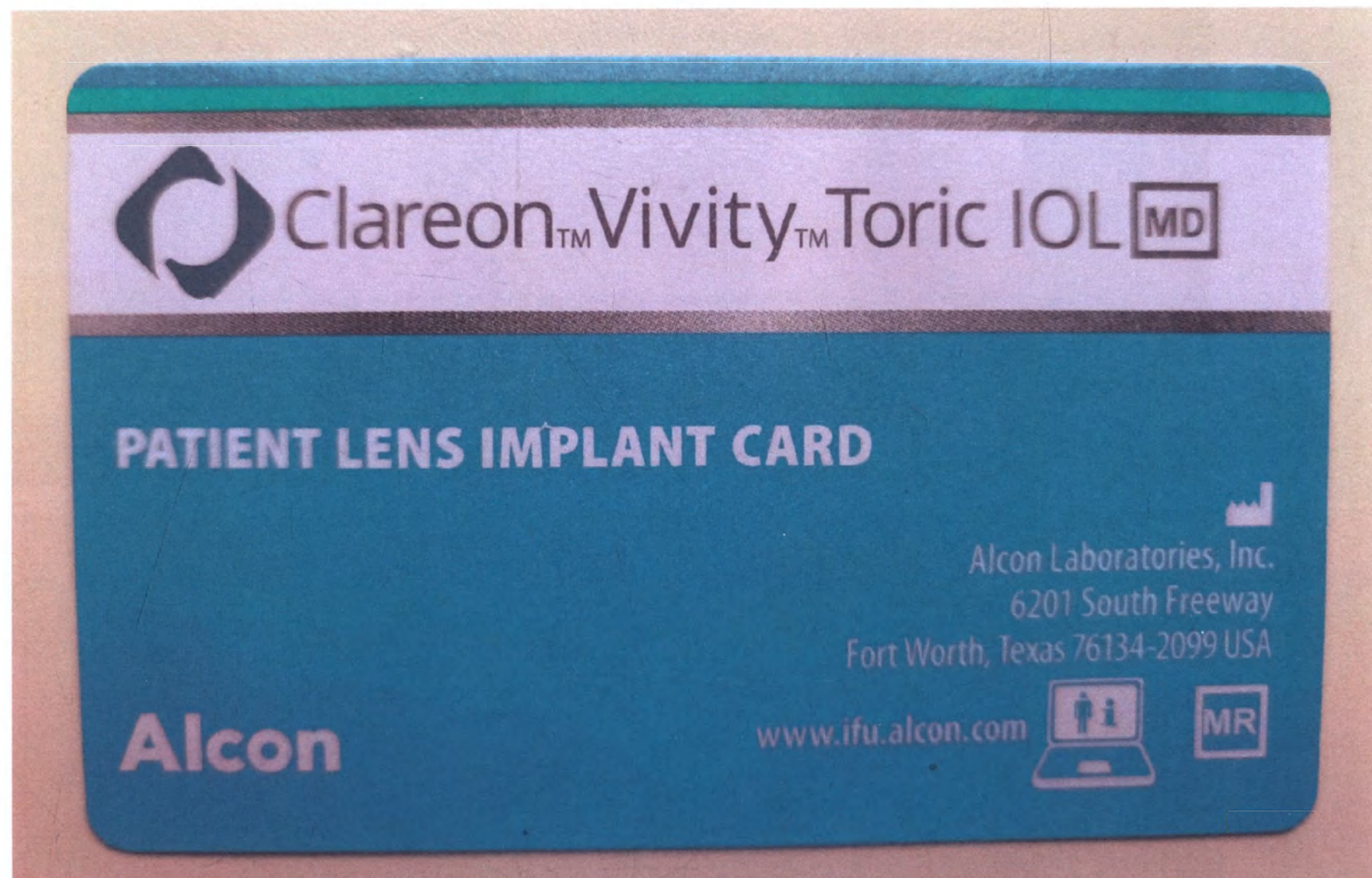

#CNAET2	D no22le
+20.0 D	CYL 1.00
SN	25128714 068

IF NO SERIAL NUMBER IS SHOWN, PLEASE WRITE IT HERE :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HOSPITAL NAME AND ADDRESS

Alcon A Novartis Division

IMPORTANT: FEDERAL REGULATIONS REQUIRE THAT THIS FORM MUST BE COMPLETED AND RETURNED TO ALCON FOR EACH LENS IMPLANTED.

THE INFORMATION PROVIDED ON THIS CARD MAY BE USED FOR BILLING PURPOSES.

PLEASE PRINT

40-500-300-NEW

ООО ЦРПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Комплект стикеров с информацией об используемой линзе

#CNAET2   REF CNAET2.200  SN 25128714 068	+20.0D CYL 1.00 Clareon Vivify™ Toric IOL GTIN 00380652459372 UDI  ϕ 13.0mm ϕ 6.0mm 2024-03-09 Alcon	#CNAET2  +20.0D CYL 1.00 SN 25128714 068 UDI 	Clareon Vivify™ Toric IOL GTIN 00380652459372 ϕ 13.0mm ϕ 6.0mm 2024-03-09 Alcon	
#CNAET2   REF CNAET2.200  SN 25128714 068	+20.0D CYL 1.00 Clareon Vivify™ Toric IOL GTIN 00380652459372 UDI  ϕ 13.0mm ϕ 6.0mm 2024-03-09 Alcon	#CNAET2  +20.0D CYL 1.00 SN 25128714 068 UDI 	Clareon Vivify™ Toric IOL GTIN 00380652459372 ϕ 13.0mm ϕ 6.0mm 2024-03-09 Alcon	
#CNAET2   REF CNAET2.200  SN 25128714 068	+20.0D CYL 1.00 Clareon Vivify™ Toric IOL GTIN 00380652459372 UDI  ϕ 13.0mm ϕ 6.0mm 2024-03-09 Alcon	#CNAET2  +20.0D CYL 1.00 SN 25128714 068 UDI 	Clareon Vivify™ Toric IOL GTIN 00380652459372 ϕ 13.0mm ϕ 6.0mm 2024-03-09 Alcon	
#CNAET2  +20.0D CYL 1.00 SN 25128714 068 UDI 	Clareon Vivify™ Toric IOL GTIN 00380652459372 ϕ 13.0mm ϕ 6.0mm 2024-03-09 Alcon	#CNAET2  +20.0D CYL 1.00 SN 25128714 068 UDI 	Clareon Vivify™ Toric IOL GTIN 00380652459372 ϕ 13.0mm ϕ 6.0mm 2024-03-09 Alcon	
#CNAET2  +20.0D CYL 1.00 SN 25128714 068 UDI 	Clareon Vivify™ Toric IOL GTIN 00380652459372 ϕ 13.0mm ϕ 6.0mm 2024-03-09 Alcon	#CNAET2  +20.0D CYL 1.00 SN 25128714 068 UDI 	Clareon Vivify™ Toric IOL GTIN 00380652459372 ϕ 13.0mm ϕ 6.0mm 2024-03-09 Alcon	
#CNAET2  +20.0D CYL 1.00 SN 25128714 068 UDI 	Clareon Vivify™ Toric IOL GTIN 00380652459372 ϕ 13.0mm ϕ 6.0mm 2024-03-09 Alcon	#CNAET2  +20.0D CYL 1.00 SN 25128714 068 UDI 	Clareon Vivify™ Toric IOL GTIN 00380652459372 ϕ 13.0mm ϕ 6.0mm 2024-03-09 Alcon	
#CNAET2  +20.0D CYL 1.00 SN 25128714 068 UDI 	Clareon Vivify™ Toric IOL GTIN 00380652459372 ϕ 13.0mm ϕ 6.0mm 2024-03-09 Alcon	#CNAET2  +20.0D CYL 1.00 SN 25128714 068 UDI 	Clareon Vivify™ Toric IOL GTIN 00380652459372 ϕ 13.0mm ϕ 6.0mm 2024-03-09 Alcon	

**ДАННУЮ ВЕРСИЮ ИНСТРУКЦИИ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая Clareon Vivity Toric расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, предустановленная в автоматизированное устройство имплантации AutonoMe, модели CNAET2, CNAET3 (оптическая сила от + 10,0 до +25,0 диоптрий, с шагом 0,5 диоптрий), CNAET4, CNAET5, CNAET6 (оптическая сила от + 10,0 до +21,0 диоптрий, с шагом 0,5 диоптрий),

в составе:

- Лоток с устройством AutonoMe, предзагруженным линзой – 1 шт.;
- Имплантационная регистрационная карта – 1 шт. (при необходимости);
- Карточка имплантата пациента – 1 шт.
- Комплект стикеров с информацией об используемой линзе – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Карта со ссылкой на инструкцию по применению в электронном виде – 1 шт.

ОПИСАНИЕ

Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая Clareon Vivity Toric расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE (именуемая далее ИОЛ Clareon Vivity Toric, модели CNWET2, CNWET3, CNWET4, CNWET5 и CNWET6), предустановленная в автоматизированное устройство имплантации AutonoMe (именуемое далее устройство имплантации AutonoMe, модели CNAET2, CNAET3, CNAET4, CNAET5 и CNAET6), что обеспечивает удобную и контролируемую надежную имплантацию ИОЛ в капсульный мешок. Торические ИОЛ Clareon Vivity Toric — это гибкие интраокулярные линзы (ИОЛ) с УФ-фильтром и фильтром синего света. В сравнении с монофокальной ИОЛ данные ИОЛ обеспечивают расширенный диапазон зрения на расстояниях от дальнего до ближнего, при этом для них не характерна повышенная частота развития нарушений зрения. Моноблочная конструкция изготовлена из мягкого гидрофобного акрила с высоким рефракционным индексом и с содержанием запатентованного хромофора, фильтрующего синий свет аналогично хрусталику глаза человека, в диапазоне длин волн от 400 до 475 нм (Boettner and Wolter, 1982). В дополнение к стандартному фильтру УФ-излучения, хромофор, фильтрующий синий свет, снижает пропускание волн синего света. Двояковыпуклая асферическая оптическая часть изготавливается из мягкого акрилового материала с высоким рефракционным индексом, что позволяет сложить линзу и имплантировать ее через разрез меньшего размера, чем диаметр оптической части линзы. После имплантации в глаз линза аккуратно расправляется и восстанавливает свои оптические характеристики. Поддерживающие гаптические элементы обеспечивают правильное расположение и фиксацию оптической части ИОЛ внутри глаза.

Расширенный диапазон глубины поля зрения и профиль нарушений зрения, схожий с аналогичным профилем монофокальных линз, достигаются при помощи элемента с запатентованной технологией формирования волнового фронта X-WAVE, располагающегося на передней поверхности ИОЛ. Подобно монофокальной ИОЛ, технология формирования волнового фронта X-WAVE использует практически всю световую энергию. Применение технологии формирования волнового фронта X-WAVE является идентичной для линз с любой оптической силой. Передняя поверхность ИОЛ Clareon Vivity Toric создана с отрицательной сферической аберрацией для компенсации положительной сферической аберрации усредненной роговицы. Биконическая задняя поверхность линзы обеспечивает ее торичность для коррекции роговичного астигматизма. Плоский меридиан торических ИОЛ Clareon Vivity Toric определяется по углублениям в форме точек на задней поверхности оптической части.

Автоматизированное устройство имплантации ИОЛ AutonoMe представляет собой одноразовое устройство для хранения линзы и инжекторное устройство для ее имплантации. Данное изделие поставляется в полностью собранном виде с ИОЛ, помещенной в отсек для линзы. Устройство имеет рычаг управления скоростью имплантации ИОЛ, который позволяет выполнять ее имплантацию одной рукой. Продвижение ИОЛ осуществляется под действием внутреннего баллончика со сжатым газом, который позволяет контролировать скорость продвижения инжектора путем изменения силы нажатия на рычаг управления скоростью имплантации ИОЛ. Технические характеристики и схематичное изображение торических ИОЛ Clareon Vivity Toric и устройства для имплантации обобщены в таблице 1, а также на рисунках 1, 2 и 3.

129215 Rev. 01


ALCON IOLs

ELECTRONIC INSTRUCTIONS FOR USE REFERENCE CARD

Alcon

 www.ifu.alcon.com

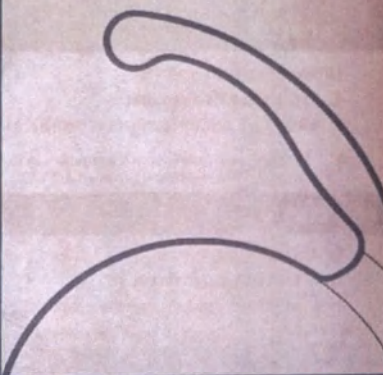

ENGLISH	DUTCH	HRVATSKI
To access Instructions for Use: - Go to www.ifu.alcon.com - Search by product name or model number  Refer to back page for paper copy requests, to be supplied within 7 days. If country not listed, please dial +31 20 794 7071.	Voor toegang tot de de gebruiksinstructies: - Ga naar www.ifu.alcon.com - Zoek op productnaam of modelnummer  De achterzijde voor aanvraag van een papieren kopie, die binnen 7 dagen geleverd wordt. Indien uw land niet vermeld wordt, kunt u bellen naar het nummer +31 20 794 7071.	Za pristup uputama za upotrebu: - Idite na www.ifu.alcon.com - Pretražite po nazivu proizvoda ili broju modela  Pogledajte zadnju stranicu za zahtjev papirne kopije, bili će dostavljena unutar 7 dana. Ukoliko zemlja nije navedena, molimo nazovite +31 20 794 7071.
ČEŠTINA	EESTI	ÍSLAND
Přístup k návodům k použití: - Použijte tento link www.ifu.alcon.com - Vyhledejte podle názvu výrobku nebo čísla modelu  Pokud požádáte papírovou kopii návodu k použití, použijte kódslov na zadní straně. Kopie vám bude zaslána do 7 dní. Pokud země není uvedena, prosím volejte +31 20 794 7071.	Kasutusjuhendi leidmiseks: - Mine www.ifu.alcon.com - Otsi toote nime või mudeli numbril järgi  Paberkoopiata, mis toimetatakse 7 päeva jooksul, pöörata info leiate tagumisel küljel. Kui riiki ei ole loetletud, palun valige +31 20 794 7071.	Til að nálgast notkunarléiðbeiningar: - Opnaðu www.ifu.alcon.com - Leitaðu eftir vöruheiti eða gerðarnúmeri  Á baksíðinni má finna upplýsingar til að biðja um leiðbeiningar á pappír, sem verða afhentar innan sjö daga. Ef landið er ekki á skrá skalt hringja í síma +31 20 794 7071.
DANSK	ESPAÑOL	ITALIANO
Her finder du brugsanvisning: - Gå til www.ifu.alcon.com - Søg på produktnavn eller modelnummer  Se bagenden for bestilling af papirudgave, som fremsendes inden for 7 dage. Hvis dit land ikke fremgår, bedes du ringe +31 20 794 7071.	Para acceder a las instrucciones de uso: - Ir a www.ifu.alcon.com - Buscar por nombre del producto o por el modelo  Para solicitar una copia en papel, consultar el reverso de la página. Las copias se entregarán en un plazo de 7 días. Si su país no aparece en el listado, por favor, llamar al +31 20 794 7071.	Per accedere alle istruzioni per l'uso: - Andare sul sito www.ifu.alcon.com - Cercare per nome prodotto o codice prodotto  In fondo alla pagina trovi le istruzioni per richiedere una copia cartacea, che sarà fornita entro 7 giorni. Nel caso in cui il Paese non sia presente nell'elenco, si prega di contattare: +31 20 794 7071.
DEUTSCH	FRANÇAIS	ҚАЗАҚ
Um Gebrauchsanweisungen zu erhalten: - Gehen Sie auf die Seite www.ifu.alcon.com - Suchen Sie nach Produktname oder Modellnummer  Für die Anforderung einer Papierversion, die Ihnen innerhalb von 7 Tagen zugestellt wird, siehe Rückseite. Falls Ihr Land nicht aufgeführt ist, wählen Sie bitte +31 20 794 7071.	Pour accéder aux instructions d'utilisation: - Allez sur le site www.ifu.alcon.com - Recherchez par nom de produit ou numéro de modèle  Reportez-vous à la dernière page pour les demandes de copie papier, à fournir dans les 7 jours. Si le pays ne figure pas dans la liste, veuillez composer le +31 20 794 7071.	Пайдалану жөніндегі нұсқаулығына қол жеткізу үшін: www.ifu.alcon.com әтіңіз - Өнім атауы немесе үлгі нөмірі бойынша іздеуді пайдаланыңыз  Қазақша нұсқаумен қол жеткізілетін болса, жасадағы соңғы бетке жүгіңіз, нұсқаушы 7 күн ішінде ұсынылады. Егер ол тілде болмаса, +31 20 794 7071 нөміріне қоңырау шалыңыз.

ARGENTINA: +800 135 79 135
AUSTRALIA: +800 135 79 135
BELGIUM: +800 135 79 135
BRAZIL: 0800 591 1055
CANADA: +1 855 805 8539
ČESKÁ REPUBLIKA: +800 135 79 135
CHILE: +31 20 794 7071
COLOMBIA: +800 135 79 135
CYPRUS: +800 135 79 135

DENMARK: +800 135 79 135
DEUTSCHLAND: +800 135 79 135
ECUADOR: +31 20 794 7071
ESPAÑA: +800 135 79 135
ESTONIA: 0800 0100567
FRANCE: +800 135 79 135
HRVATSKA: 0800 804 804
IRELAND: +800 135 79 135
ISLAND: 800 8996

ITALIA: +800 135 79 135
LATVIJA: +800 135 79 135
LIECHTENSTEIN: +31 20 796 5692
LIETUVA: 8800 30728
LUXEMBOURG: +800 135 79 135
MAGYARORSZÁG: +800 135 79 135
NEDERLAND: +800 135 79 135
NEW ZEALAND: +800 135 79 135
NORGE: +800 135 79 135


ÖSTERREICH: +800 135 79 135
POLSKA: +800 135 79 135
PORTUGAL: +800 135 79 135
ROMÂNIA: 0800 895 084
SINGAPORE: 800 101 3366
SLOVAKIA: 0800 606 287
SLOVENIJA: +800 135 79 135
SUOMI: +800 135 79 135
SVERIGE: +800 135 79 135

SWITZERLAND: +800 135 79 135
TÜRKİYE: 00800 142 064 866
UNITED KINGDOM: 0800 135 79 135
UNITED STATES: +1 855 236 0910
VIỆT NAM: 122 80297
БЪЛГАРИЯ: +800 135 79 135
РОССИЯ: +800 135 79 135
ΕΛΛΑΔΑ: 00800 161 2205 7799
All Other Countries: +31 20 794 7071

 **Alcon Laboratories, Inc.**
 6201 South Freeway
 Fort Worth, TX 76134-2999 USA © 2019, 2021 Alcon Inc.


300029215

Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая Clareon Vivity Toric расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, предустановленная в автоматизированное устройство имплантации AutonoMe, модель CNAET3

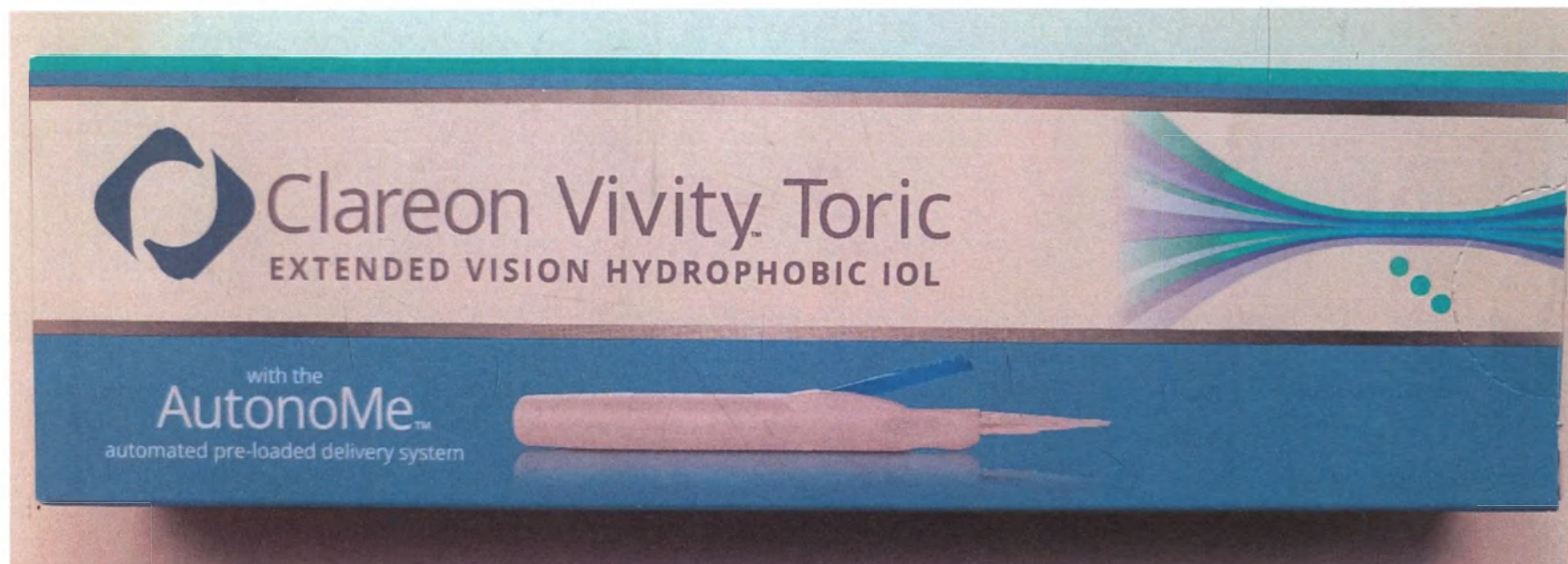



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099 USA





www.ifu.alcon.com

1 x STERILEEO POSTERIOR CHAMBER IOL

EC REP

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Poesse-Sint-Amands
Belgium

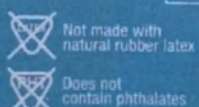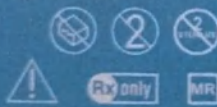

59°F
15°C

MD



Alcon

Clareon Vivity™ Toric IOL

CNAET3 **+10.0D** CYL 1.50

D nozzle




UV &
BLUE
LIGHT
FILTER





SN 25128718 068 2024-02-25


Alcon

Лоток с устройством AutoNoMe, предзагруженной линзой

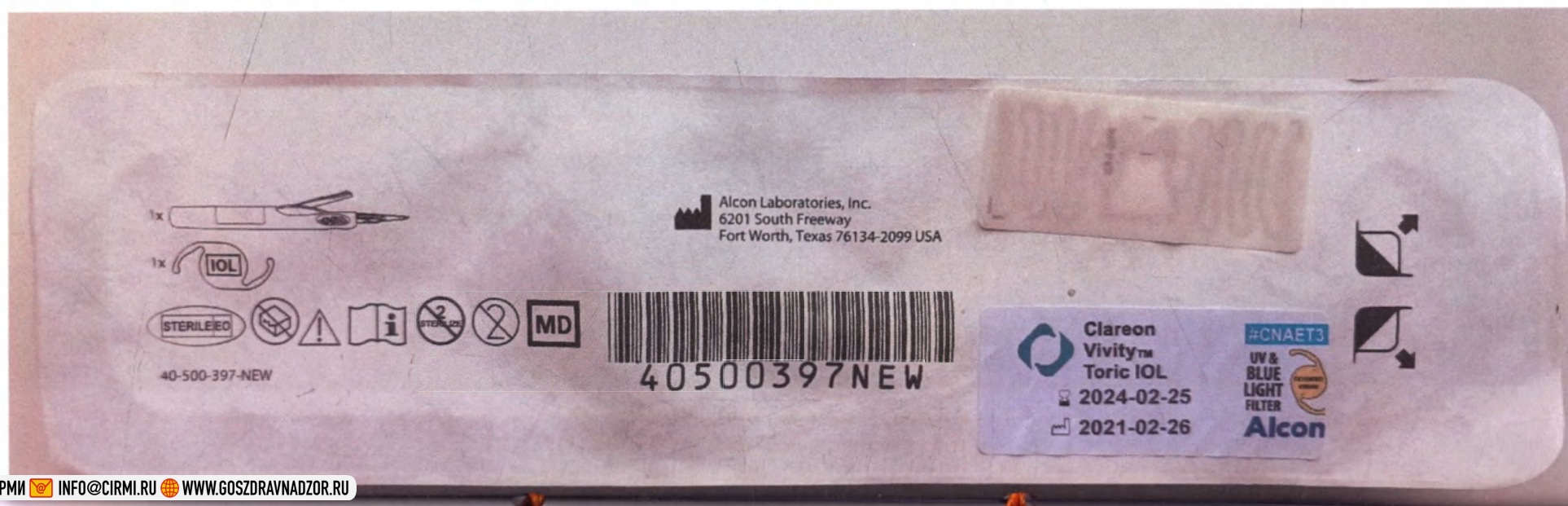

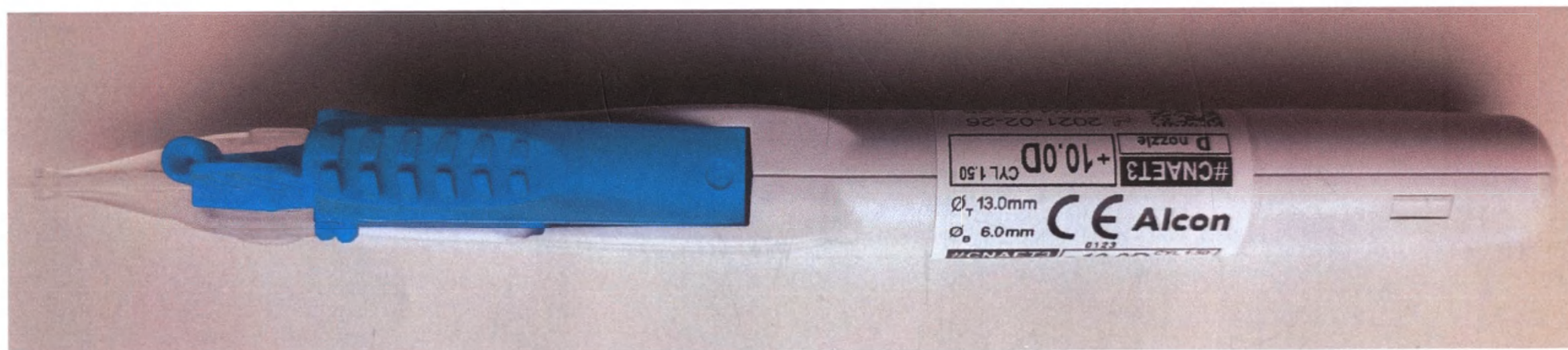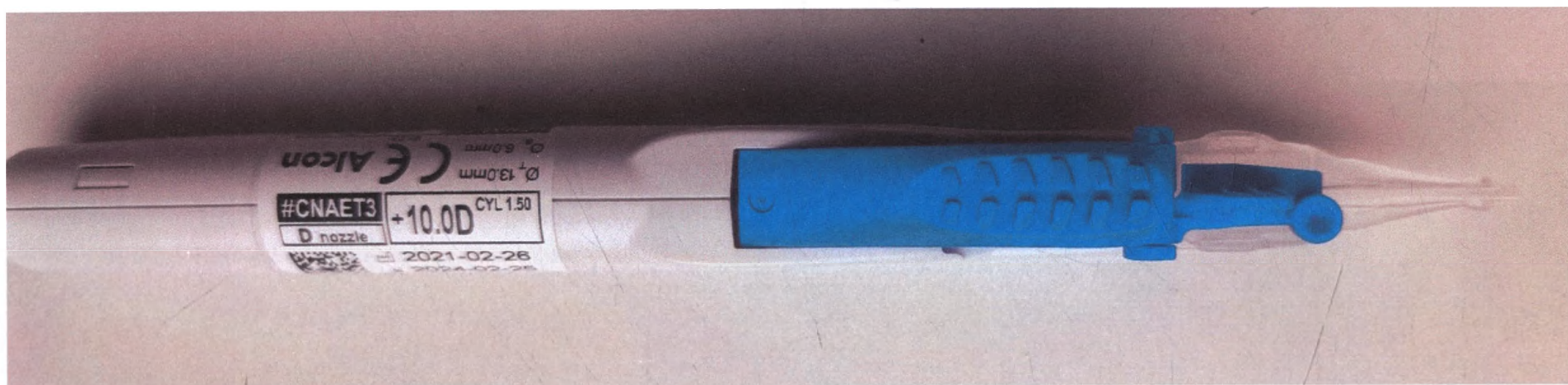



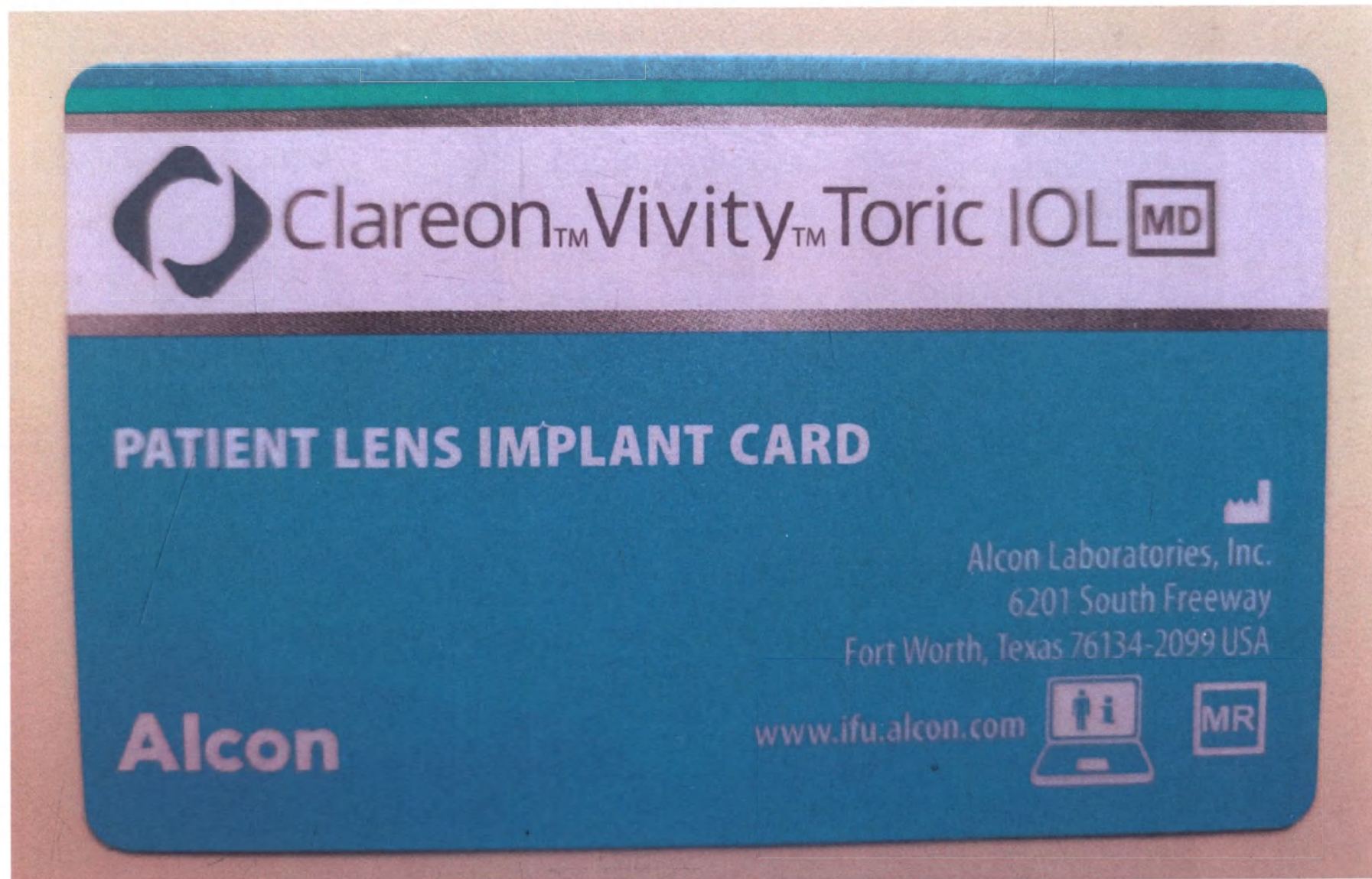

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Комплект стикеров с информацией об используемой линзе

#CNAET3 D nozzle

+10.0D CYL 1.50

Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652484503

UDI

Ø 13.0mm
Ø 6.0mm

2024-02-25

Alcon

UV & BLUE LIGHT FILTER

#CNAET3 D nozzle

+10.0D CYL 1.50

Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652484503

Ø 13.0mm
Ø 6.0mm

2024-02-25

Alcon

UV & BLUE LIGHT FILTER

#CNAET3 D nozzle

+10.0D CYL 1.50

Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652484503

UDI

Ø 13.0mm
Ø 6.0mm

2024-02-25

Alcon

UV & BLUE LIGHT FILTER

#CNAET3 D nozzle

+10.0D CYL 1.50

Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652484503

Ø 13.0mm
Ø 6.0mm

2024-02-25

Alcon

UV & BLUE LIGHT FILTER

#CNAET3 D nozzle

+10.0D CYL 1.50

Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652484503

UDI

Ø 13.0mm
Ø 6.0mm

2024-02-25

Alcon

UV & BLUE LIGHT FILTER

#CNAET3 D nozzle

+10.0D CYL 1.50

Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652484503

Ø 13.0mm
Ø 6.0mm

2024-02-25

Alcon

UV & BLUE LIGHT FILTER

#CNAET3

+10.0D CYL 1.50

Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652484503

UDI

Ø 13.0mm
Ø 6.0mm

2024-02-25

Alcon

UV & BLUE LIGHT FILTER

CE 1123

SN 25128718 068

UNION

L R

AFFIX TO IMPLANT CARD

#CNAET3 D nozzle

+10.0D CYL 1.50

Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652484503

Ø 13.0mm
Ø 6.0mm

2024-02-25

Alcon

UV & BLUE LIGHT FILTER

SN 25128718 068

**ДАННУЮ ВЕРСИЮ ИНСТРУКЦИИ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая Clareon Vivify Toric расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, предустановленная в автоматизированное устройство имплантации AutonoMe, модели CNAET2, CNAET3 (оптическая сила от + 10,0 до +25,0 диоптрий, с шагом 0,5 диоптрий), CNAET4, CNAET5, CNAET6 (оптическая сила от + 10,0 до +21,0 диоптрий, с шагом 0,5 диоптрий),

в составе:

- Лоток с устройством AutonoMe, презагруженным линзой – 1 шт.;
- Имплантационная регистрационная карта – 1 шт. (при необходимости);
- Карточка имплантата пациента – 1 шт.
- Комплект стикеров с информацией об используемой линзе – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Карта со ссылкой на инструкцию по применению в электронном виде – 1 шт.

ОПИСАНИЕ

Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая Clareon Vivify Toric расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE (именуемая далее ИОЛ Clareon Vivify Toric, модели CNWET2, CNWET3, CNWET4, CNWET5 и CNWET6), предустановленная в автоматизированное устройство имплантации AutonoMe (именуемое далее устройство имплантации AutonoMe, модели CNAET2, CNAET3, CNAET4, CNAET5 и CNAET6), что обеспечивает удобную и контролируемую надежную имплантацию ИОЛ в капсульный мешок. Торические ИОЛ Clareon Vivify Toric — это гибкие интраокулярные линзы (ИОЛ) с УФ-фильтром и фильтром синего света. В сравнении с монофокальной ИОЛ данные ИОЛ обеспечивают расширенный диапазон зрения на расстояниях от дальнего до ближнего, при этом для них не характерна повышенная частота развития нарушений зрения. Моноблочная конструкция изготовлена из мягкого гидрофобного акрила с высоким рефракционным индексом и с содержанием запатентованного хромофора, фильтрующего синий свет аналогично хрусталику глаза человека, в диапазоне длин волн от 400 до 475 нм (Boettner and Wolter, 1962). В дополнение к стандартному фильтру УФ-излучения, хромофор, фильтрующий синий свет, снижает пропускание волн синего света. Двояковыпуклая асферическая оптическая часть изготавливается из мягкого акрилового материала с высоким рефракционным индексом, что позволяет сложить линзу и имплантировать ее через разрез меньшего размера, чем диаметр оптической части линзы. После имплантации в глаз линза аккуратно расправляется и восстанавливает свои оптические характеристики. Поддерживающие галтические элементы обеспечивают правильное расположение и фиксацию оптической части ИОЛ внутри глаза.

Расширенный диапазон глубины поля зрения и профиль нарушений зрения, схожий с аналогичным профилем монофокальных линз, достигаются при помощи элемента с запатентованной технологией формирования волнового фронта X-WAVE, располагающегося на передней поверхности ИОЛ. Подобно монофокальной ИОЛ, технология формирования волнового фронта X-WAVE использует практически всю световую энергию. Применение технологии формирования волнового фронта X-WAVE является идентичной для линз с любой оптической силой. Передняя поверхность ИОЛ Clareon Vivify Toric создана с отрицательной сферической аберрацией для компенсации положительной сферической аберрации усредненной роговицы. Биконическая задняя поверхность линзы обеспечивает ее торичность для коррекции роговчатого астигматизма. Плоский меридиан торических ИОЛ Clareon Vivify Toric определяется по углублениям в форме точек на задней поверхности оптической части.

Автоматизированное устройство имплантации ИОЛ AutonoMe представляет собой одноразовое устройство для хранения линзы и инъекторное устройство для ее имплантации. Данное изделие поставляется в полностью собранном виде с ИОЛ, помещенной в отсек для линзы. Устройство имеет рычаг управления скоростью имплантации ИОЛ, который позволяет выполнять ее имплантацию одной рукой. Продвижение ИОЛ осуществляется под действием внутреннего баллончика со сжатым газом, который позволяет контролировать скорость продвижения инъектора путем изменения силы нажатия на рычаг управления скоростью имплантации ИОЛ. Технические характеристики и схематичное изображение торических ИОЛ Clareon Vivify Toric и устройства для имплантации обобщены в таблице 1, а также на рисунках 1, 2 и 3.

029213 Rev. 01

ALCON IOLs

ELECTRONIC INSTRUCTIONS FOR USE REFERENCE CARD

Alcon

 www.ifu.alcon.com



ENGLISH	DUTCH	HRVATSKI
To access Instructions for Use: - Go to www.ifu.alcon.com - Search by product name or model number  Refer to back page for paper copy requests, to be supplied within 7 days. If country not listed, please dial +31 20 794 7071.	Voor toegang tot de de gebruiksinstructies: - Ga naar www.ifu.alcon.com - Zoek op productnaam of modelnummer  Zie achterzijde voor aanvraag van een papieren kopie, die binnen 7 dagen geleverd wordt. Indien uw land niet vermeld wordt, kunt u bellen naar het nummer +31 20 794 7071.	Za pristup uputama za upotrebu: - Idite na www.ifu.alcon.com - Pretražite po nazivu proizvoda ili broju modela  Pogledajte zadnju stranicu za zahtjev papirnate kopije, biti će dostavljena unutar 7 dana. Ukoliko zemlja nije navedena, molimo nazovite +31 20 794 7071.
ČEŠTINA	EESTI	ÍSLAND
Přístup k návodu k použití: - Použijte tento link www.ifu.alcon.com - Vyhledejte podle názvu výrobku nebo čísla modelu  Pokud požadujete papírovou kopii návodu k použití, použijte kontakt na zadní straně. Kopie Vám bude zaslána do 7 dní. Pokud země není uvedena, prosím volejte +31 20 794 7071.	Kasutusjuhendi leidmiseks: - Mine www.ifu.alcon.com - Otsi toote nime või mudeli numbril järgi  Paberkoopiale, mis toimetatakse 7 päeva jooksul, pöörduge info lehele tagumisel küljel. Kui riiki ei ole loetletud, palun valige +31 20 794 7071.	Til að nálgast notkunarléiðbeiningar: - Opnaðu www.ifu.alcon.com - Leitaðu eftir vörunefni eða gerðarnúmeri  Á baksíðu þessu síðu er upplýsingar um að biðja um leiðbeiningar á pappír, sem verða afhentar innan sjö daga. Ef landið er ekki á skrá skal hringja í síma +31 20 794 7071.
DANSK	ESPAÑOL	ITALIANO
Her finder du brugsanvisning: - Gå til www.ifu.alcon.com - Søg på produktnavn eller modelnummer  Se bagenden for bestilling af papirkopier, som fremsendes inden for 7 dage. Hvis dit land ikke fremgår, bedes du ringe +31 20 794 7071.	Para acceder a las instrucciones de uso: - Ir a www.ifu.alcon.com - Buscar por nombre del producto o por el modelo  Para solicitar una copia en papel, consultar el reverso de la página. Las copias se entregarán en un plazo de 7 días. Si su país no aparece en el listado, por favor, llamar al +31 20 794 7071.	Per accedere alle istruzioni per l'uso: - Andare sul sito www.ifu.alcon.com - Cercare per nome prodotto o codice prodotto  In fondo alla pagina trovi le istruzioni per richiedere una copia cartacea, che sarà fornita entro 7 giorni. Nel caso in cui il Paese non sia presente nell'elenco, si prega di contattare: +31 20 794 7071.
DEUTSCH	FRANÇAIS	ҚАЗАҚ
Um Gebrauchsanweisungen zu erhalten: - Gehen Sie auf die Seite www.ifu.alcon.com - Suchen Sie nach Produktname oder Modellnummer  Für die Anforderung einer Papierversion, die Ihnen innerhalb von 7 Tagen ausgestellt wird, siehe Rückseite. Falls Ihr Land nicht aufgeführt ist, wählen Sie bitte +31 20 794 7071.	Pour accéder aux instructions d'utilisation: - Aller sur le site www.ifu.alcon.com - Recherchez par nom de produit ou numéro de modèle  Reportez-vous à la dernière page pour les demandes de copie papier, à fournir dans les 7 jours. Si le pays ne figure pas dans la liste, veuillez composer le +31 20 794 7071.	Пайдалану жөніндегі нұсқаулығына қол жеткізу үшін: www.ifu.alcon.com өңізі - Өнім атауы немесе үлгі нөмірі бойынша іздеуді пайдаланыңыз  Құпия көшірмесін ұсыну қажет болған жағдайда соңғы бетте жүргізіңіз, көшірме 7 күн ішінде ұсынылады. Егер ел тізімде болмаса, +31 20 794 7071 нөміріне хаттаңыз.

ARGENTINA: +800 135 79 135

AUSTRALIA: +800 135 79 135

BELGIUM: +800 135 79 135

BRAZIL: 0800 591 1055

CANADA: +1 855 805 8539

ČESKÁ REPUBLIKA: +800 135 79 135

CHILE: +31 20 794 7071

COLOMBIA: +800 135 79 135

CYPRUS: +800 135 79 135

DANMARK: +800 135 79 135

DEUTSCHLAND: +800 135 79 135

ECUADOR: +31 20 794 7071

ESPAÑA: +800 135 79 135

ESTONIA: 0800 0100567

FRANCE: +800 135 79 135

HRVATSKA: 0800 804 804

IRELAND: +800 135 79 135

ISLAND: 800 8996

ITALIA: +800 135 79 135

LATVIJA: +800 135 79 135

LIECHTENSTEIN: +31 20 796 5692

LIEUTUA: 8800 30728

LUXEMBOURG: +800 135 79 135

MAGYARORSZÁG: +800 135 79 135

NEDERLAND: +800 135 79 135

NEW ZEALAND: +800 135 79 135

NORGE: +800 135 79 135

ÖSTERREICH: +800 135 79 135

POLSKA: +800 135 79 135

PORTUGAL: +800 135 79 135

ROMÂNIA: 0800 895 084

SINGAPORE: 800 101 3366

SLOVAKIA: 0800 606 287

SLOVENIJA: +800 135 79 135

SUOMI: +800 135 79 135

SVERIGE: +800 135 79 135

SWITZERLAND: +800 135 79 135

TÜRKİYE: 00800 142 064 866

UNITED KINGDOM: 0800 135 79 135

ROMANIA: 0800 895 084

UNITED STATES: +1 855 236 0910

VIỆT NAM: 122 80297

БЪЛГАРИЯ: +800 135 79 135

РОССИЯ: +800 135 79 135


ΕΛΛΑΔΑ: 00800 161 2205 7799

All Other Countries: +31 20 794 7071

 **Alcon Laboratories, Inc.**
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099 USA © 2019, 2021 Alcon Inc.


300029215



Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая Clareon Vivity Toric расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, предустановленная в автоматизированное устройство имплантации AutonoMe, модель CNAET4

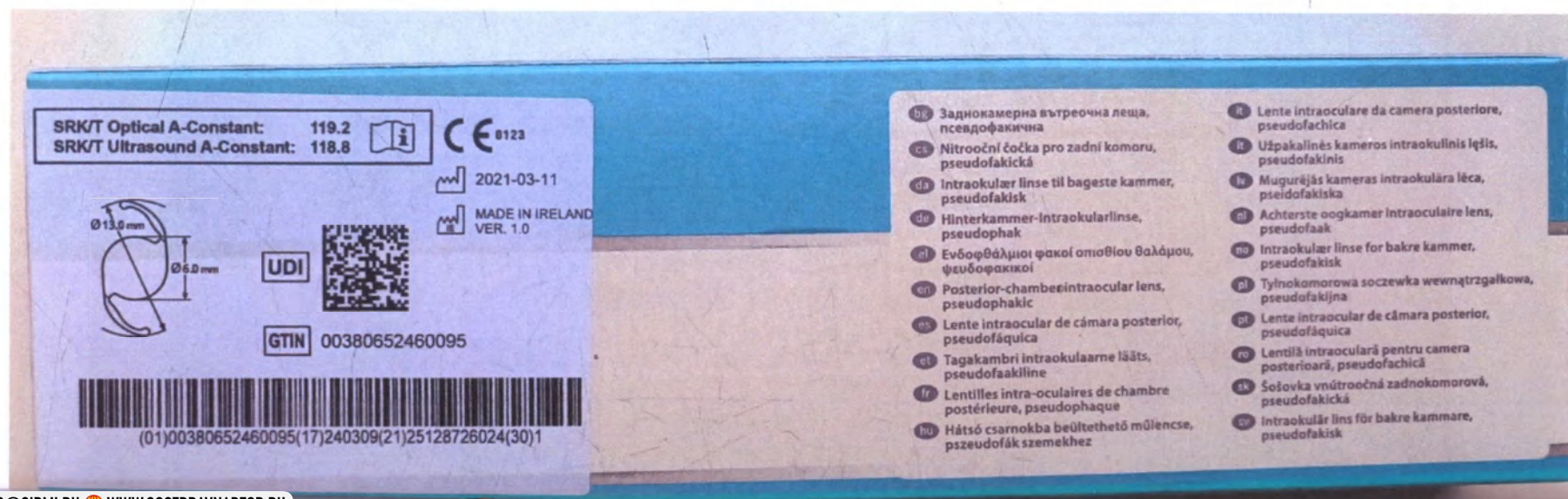




Лоток с устройством AutoNoMe, предзагруженной линзой



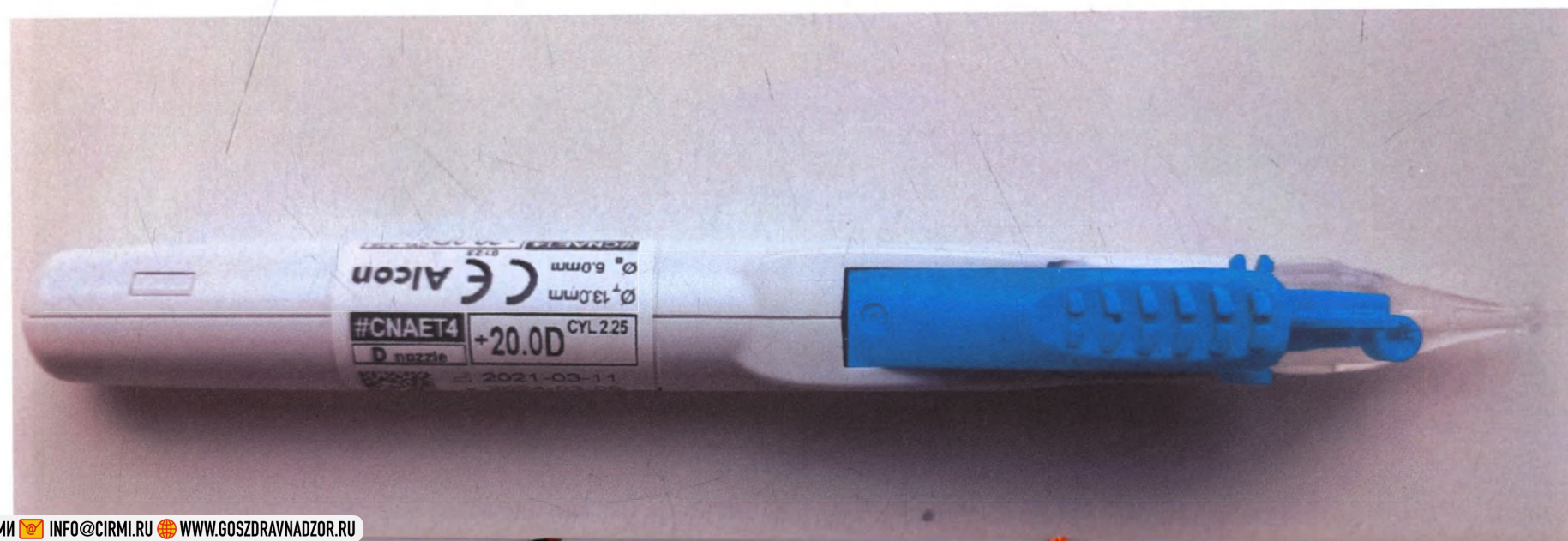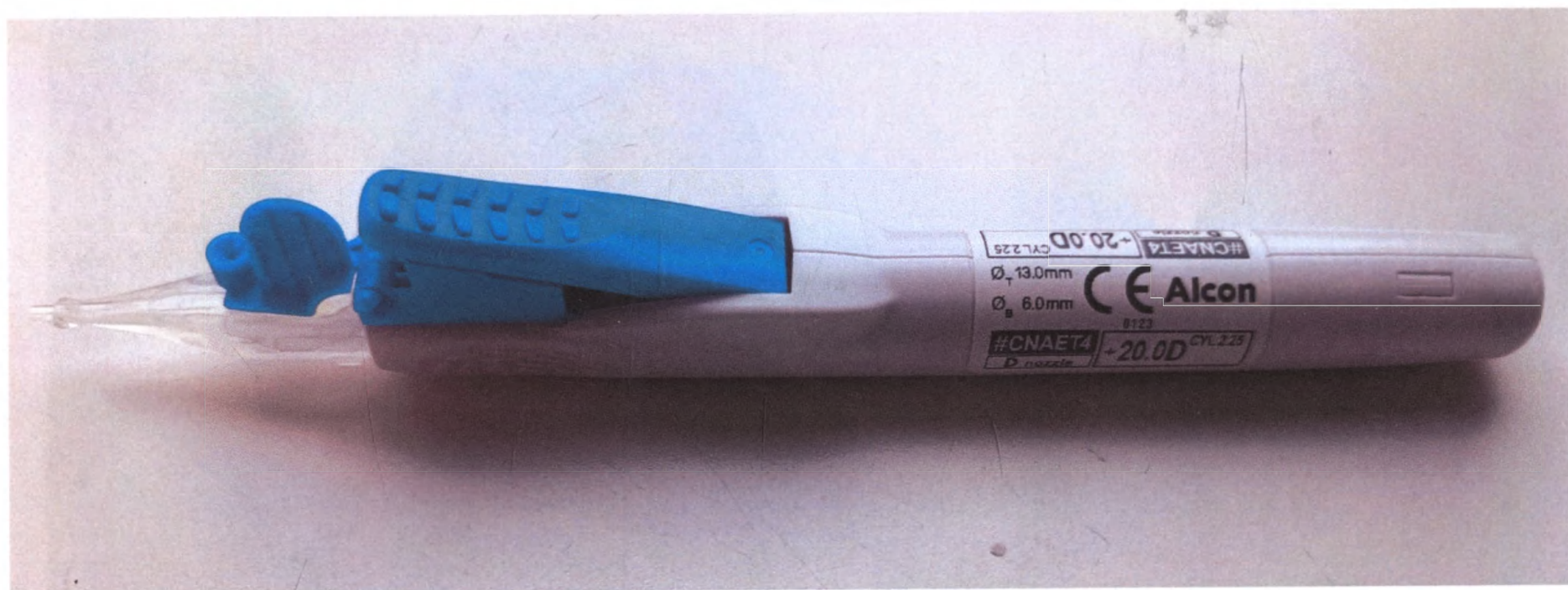



Имплантационная регистрационная карта

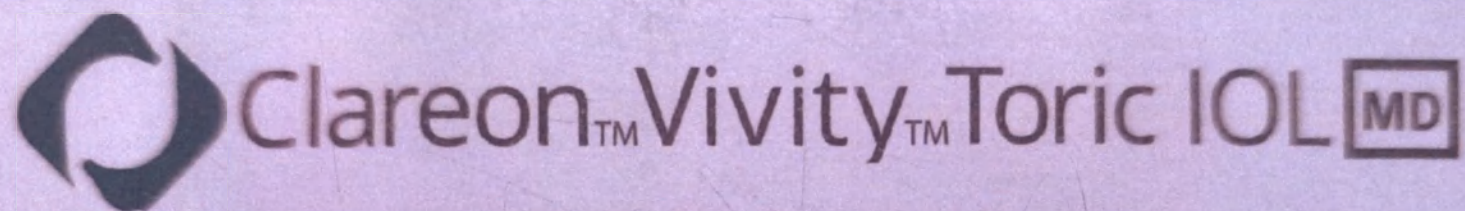



PATIENT LENS IMPLANT CARD

Alcon


Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099 USA

www.ifu.alcon.com

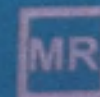
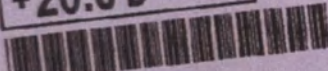
#CNAET4 D nozzle +20.0 D CYL 225  SN 25128726 024 IF NO SERIAL NUMBER IS SHOWN, PLEASE WRITE IT HERE :	 Alcon A Novartis Division 40-500-300-NEW IMPORTANT: FEDERAL REGULATIONS REQUIRE THAT THIS FORM MUST BE COMPLETED AND RETURNED TO ALCON FOR EACH LENS IMPLANTED. THE INFORMATION PROVIDED ON THIS CARD MAY BE USED FOR BILLING PURPOSES. PLEASE PRINT HOSPITAL NAME AND ADDRESS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; height: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																

PATIENT INFORMATION															IMPLANTING PHYSICIAN															
Last Name															Last Name															
First Name/ M.I.															First Name/ M.I.															
Surgery Date	M			D			Y													State License #										

UNCOMPLETED FORM IN PROVIDED POSTAGE PAID ENVELOPE

Billing P.O. #:

Комплект стикеров с информацией об используемой линзе

#CNAET4 D nozzle

+20.0D CYL 2.25

Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652460095

UDI

UV & BLUE LIGHT FILTER

Alcon

2024-03-09

REF CNAET4.200

SN 25128726 024

Ø₁ 13.0mm

Ø₂ 6.0mm

#CNAET4 D nozzle

+20.0D CYL 2.25

Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652460095

UDI

UV & BLUE LIGHT FILTER

Alcon

2024-03-09

SN 25128726 024

Ø₁ 13.0mm

Ø₂ 6.0mm

#CNAET4 D nozzle

+20.0D CYL 2.25

Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652460095

UDI

UV & BLUE LIGHT FILTER

Alcon

2024-03-09

SN 25128726 024

Ø₁ 13.0mm

Ø₂ 6.0mm

#CNAET4 D nozzle

+20.0D CYL 2.25

Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652460095

UDI

UV & BLUE LIGHT FILTER

Alcon

2024-03-09

REF CNAET4.200

SN 25128726 024

Ø₁ 13.0mm

Ø₂ 6.0mm

#CNAET4 D nozzle

+20.0D CYL 2.25

Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652460095

UDI

UV & BLUE LIGHT FILTER

Alcon

2024-03-09

SN 25128726 024

Ø₁ 13.0mm

Ø₂ 6.0mm

#CNAET4 D nozzle

+20.0D CYL 2.25

Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652460095

UDI

UV & BLUE LIGHT FILTER

Alcon

2024-03-09

SN 25128726 024

Ø₁ 13.0mm

Ø₂ 6.0mm

#CNAET4 D nozzle

+20.0D CYL 2.25

Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652460095

UDI

UV & BLUE LIGHT FILTER

Alcon

2024-03-09

REF CNAET4.200

SN 25128726 024

Ø₁ 13.0mm

Ø₂ 6.0mm

#CNAET4 D nozzle

+20.0D CYL 2.25

Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652460095

UDI

UV & BLUE LIGHT FILTER

Alcon

2024-03-09

SN 25128726 024

Ø₁ 13.0mm

Ø₂ 6.0mm

#CNAET4 D nozzle

+20.0D CYL 2.25

Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652460095

UDI

UV & BLUE LIGHT FILTER

Alcon

2024-03-09

SN 25128726 024

Ø₁ 13.0mm

Ø₂ 6.0mm

#CNAET4 Clareon Vivivity™ Toric IOL

+20.0D CYL 2.25

GTIN 00380652460095

UDI

UV & BLUE LIGHT FILTER

Alcon

2024-03-09

REF CNAET4.200

SN 25128726 024

Ø₁ 13.0mm

Ø₂ 6.0mm

CE 0123

L R

AFFIX TO IMPLANT CARD

#CNAET4 D nozzle

+20.0D CYL 2.25

Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652460095

UDI

UV & BLUE LIGHT FILTER

Alcon

2024-03-09

SN 25128726 024

Ø₁ 13.0mm

Ø₂ 6.0mm

#CNAET4 +20.0D CYL 2.25

SN 25128726 024

#CNAET4 +20.0D CYL 2.25

SN 25128726 024

**ДАННУЮ ВЕРСИЮ ИНСТРУКЦИИ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая Clareon Vivity Toric расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, предустановленная в автоматизированное устройство имплантации AutonoMe, модели CNAET2, CNAET3 (оптическая сила от + 10,0 до +25,0 диоптрий, с шагом 0,5 диоптрий), CNAET4, CNAET5, CNAET6 (оптическая сила от + 10,0 до +21,0 диоптрий, с шагом 0,5 диоптрий), в составе:

- Лоток с устройством AutonoMe, предзагруженным линзой – 1 шт.;
- Имплантационная регистрационная карта – 1 шт. (при необходимости);
- Карточка имплантата пациента – 1 шт.
- Комплект стикеров с информацией об используемой линзе – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Карта со ссылкой на инструкцию по применению в электронном виде – 1 шт.

ОПИСАНИЕ

Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая Clareon Vivity Toric расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE (именуемая далее ИОЛ Clareon Vivity Toric, модели CNWET2, CNWET3, CNWET4, CNWET5 и CNWET6), предустановленная в автоматизированное устройство имплантации AutonoMe (именуемое далее устройство имплантации AutonoMe, модели CNAET2, CNAET3, CNAET4, CNAET5 и CNAET6), что обеспечивает удобную и контролируемую надежную имплантацию ИОЛ в капсульный мешок. Торические ИОЛ Clareon Vivity Toric — это гибкие интраокулярные линзы (ИОЛ) с УФ-фильтром и фильтром синего света. В сравнении с монофокальной ИОЛ данные ИОЛ обеспечивают расширенный диапазон зрения на расстояниях от дальнего до ближнего, при этом для них не характерна повышенная частота развития нарушений зрения. Моноблочная конструкция изготовлена из мягкого гидрофобного акрила с высоким рефракционным индексом и с содержанием запатентованного хромофора, фильтрующего синий свет аналогично хрусталику глаза человека, в диапазоне длин волн от 400 до 475 нм (Boettner and Wolter, 1982). В дополнение к стандартному фильтру УФ-излучения, хромофор, фильтрующий синий свет, снижает пропускание волн синего света. Двояковыпуклая асферическая оптическая часть изготавливается из мягкого акрилового материала с высоким рефракционным индексом, что позволяет сложить линзу и имплантировать ее через разрез меньшего размера, чем диаметр оптической части линзы. После имплантации в глаз линза аккуратно расправляется и восстанавливает свои оптические характеристики. Поддерживающие гаптические элементы обеспечивают правильное расположение и фиксацию оптической части ИОЛ внутри глаза.

Расширенный диапазон глубины поля зрения и профиль нарушений зрения, схожий с аналогичным профилем монофокальных линз, достигаются при помощи элемента с запатентованной технологией формирования волнового фронта X-WAVE, располагающегося на передней поверхности ИОЛ. Подобно монофокальной ИОЛ, технология формирования волнового фронта X-WAVE использует практически всю световую энергию. Применение технологии формирования волнового фронта X-WAVE является идентичной для линз с любой оптической силой. Передняя поверхность ИОЛ Clareon Vivity Toric создана с отрицательной сферической аберрацией для компенсации положительной сферической аберрации усредненной роговицы. Биконическая задняя поверхность линзы обеспечивает ее торичность для коррекции роговичного астигматизма. Плоский меридиан торических ИОЛ Clareon Vivity Toric определяется по углублениям в форме точек на задней поверхности оптической части.

Автоматизированное устройство имплантации ИОЛ AutonoMe представляет собой одноразовое устройство для хранения линзы и инжекторное устройство для ее имплантации. Данное изделие поставляется в полностью собранном виде с ИОЛ, помещенной в отсек для линзы. Устройство имеет рычаг управления скоростью имплантации ИОЛ, который позволяет выполнять ее имплантацию одной рукой. Продвижение ИОЛ осуществляется под действием внутреннего баллончика со сжатым газом, который позволяет контролировать скорость продвижения инжектора путем изменения силы нажатия на рычаг управления скоростью имплантации ИОЛ. Технические характеристики и схематичное изображение торических ИОЛ Clareon Vivity Toric и устройства для имплантации обобщены в таблице 1, а также на рисунках 1, 2 и 3.

29215 Rev. 01

ALCON IOLs

ELECTRONIC INSTRUCTIONS FOR USE REFERENCE CARD



Alcon

www.ifu.alcon.com

ENGLISH

To access Instructions for Use:

1. Go to www.ifu.alcon.com
2. Search by product name or model number

Refer to back page for paper copy requests, to be supplied within 7 days. If country not listed, please dial +31 20 794 7071.

DUTCH

Voor toegang tot de de gebruiksinstructies:

1. Ga naar www.ifu.alcon.com
2. Zoek op productnaam of modelnummer

Zie achterzijde voor aanvraag van een papieren kopie, die binnen 7 dagen geleverd wordt. Indien uw land niet vermeld wordt, kunt u bellen naar het nummer +31 20 794 7071.

HRVATSKI

Za pristup uputama za upotrebu:

1. Idite na www.ifu.alcon.com
2. Pretražite po nazivu proizvoda ili broju modela

Pogledajte zadnju stranicu za zahtjev papirnate kopije, biti će dostavljena unutar 7 dana. Ukoliko zemlja nije navedena, molimo nazovite +31 20 794 7071.

ČEŠTINA

Přístup k návodu k použití:

1. Použijte tento link www.ifu.alcon.com
2. Vyhledejte podle názvu výrobku nebo čísla modelu

Pokud požadujete papírovou kopii návodu k použití, použijte kontaktní na zadní straně. Kopie Vám bude zasílána do 7 dní. Pokud země není uvedena, prosíme volat +31 20 794 7071.

EESTI

Kasutusjuhendi leidmiseks:

1. Mine www.ifu.alcon.com
2. Otsi toote nime või mudeli numbril järgi

Paberkoopiate, mis toimetatakse 7 päeva jooksul, päringu info leiate tagumisele küljelt. Kui riiki ei ole loetletud, palun valige +31 20 794 7071.

ÍSLAND

Til að nálgast notkunarléiðbeiningar:

1. Opnaðu www.ifu.alcon.com
2. Leitaðu eftir vöruleiti eða gerðarnúmeri

Á bakiðunnni má finna upplýsingar til að biðja um leiðbeiningar á pappír, sem verða afhentar innan sýð daga. Ef landið er ekki á síðu skal hringja í síma +31 20 794 7071.

DANSK

Her finder du brugsanvisning:

1. Gå til www.ifu.alcon.com
2. Søg på produktnavn eller modelnummer

Se bagenden for beskrivelse af papirudgave, som fremsendes inden for 7 dage. Hvis dit land ikke fremgår, bedes du ringe +31 20 794 7071.

ESPAÑOL

Para acceder a las instrucciones de uso:

1. Ir a www.ifu.alcon.com
2. Buscar por nombre del producto o por el modelo

Para solicitar una copia en papel, consultar el reverso de la página. Las copias se entregarán en un plazo de 7 días. Si su país no aparece en el listado, por favor, llamar al +31 20 794 7071.

ITALIANO

Per accedere alle Istruzioni per l'Uso:

1. Andare sul sito www.ifu.alcon.com
2. Cercare per nome prodotto o codice prodotto

In fondo alla pagina trovi le istruzioni per richiedere una copia cartacea, che sarà fornita entro 7 giorni. Nel caso in cui il Paese non sia presente nell'elenco, si prega di contattare: +31 20 794 7071.

DEUTSCH

Um Gebrauchsanweisungen zu erhalten:

1. Gehen Sie auf die Seite www.ifu.alcon.com
2. Suchen Sie nach Produktname oder Modellnummer

Für die Anforderung einer Papierversion, die Ihnen innerhalb von 7 Tagen zugestellt wird, siehe Rückseite. Falls Ihr Land nicht aufgeführt ist, wählen Sie bitte +31 20 794 7071.

FRANÇAIS

Pour accéder aux instructions d'utilisation:

1. Aller sur le site www.ifu.alcon.com
2. Recherchez par nom de produit ou numéro de modèle

Reportez-vous à la dernière page pour les demandes de copie papier, à fournir dans les 7 jours. Si le pays ne figure pas dans la liste, veuillez composer le +31 20 794 7071.

ҚАЗАҚ

Пайдалану жөніндегі нұсқаулығына қол жеткізу үшін:

1. www.ifu.alcon.com өңімі
2. Өнім атауы немесе үлгі нөмірі бойынша іздеуді пайдаланыңыз

Қазақ тіліндегі нұсқаулықты қағаз болып жаздырды соңғы бетке жеткізіңіз, қосымша 7 күн ішінде ұсынылады. Егер өл тілде болмаса, +31 20 794 7071 нөміріне қосылуы қажет.

(AR) Argentina: +800 135 79 135
(AU) Australia: +800 135 79 135
(BE) Belgium: +800 135 79 135
(BR) Brazil: 0800 591 1055
(CA) Canada: +1 855 805 8539
(CZ) Česká Republika: +800 135 79 135
(CL) Chile: +31 20 794 7071
(CO) Colombia: +800 135 79 135
(CY) Cyprus: +800 135 79 135

(DK) Danmark: +800 135 79 135
(DE) Deutschland: +800 135 79 135
(EC) Ecuador: +31 20 794 7071
(ES) España: +800 135 79 135
(EE) Eesti: 0800 0100567
(FR) France: +800 135 79 135
(HR) Hrvatska: 0800 804 804
(IE) Ireland: +800 135 79 135
(IS) Ísland: 800 8996

(IT) Italia: +800 135 79 135
(LV) Latvija: +800 135 79 135
(LI) Liechtenstein: +31 20 796 5692
(LT) Lietuva: 8800 30728
(LU) Luxembourg: +800 135 79 135
(HU) Magyarország: +800 135 79 135
(NL) Nederland: +800 135 79 135
(NZ) New Zealand: +800 135 79 135
(NO) Norge: +800 135 79 135

(AT) Österreich: +800 135 79 135
(PL) Polska: +800 135 79 135
(PT) Portugal: +800 135 79 135
(RO) România: 0800 895 084
(SG) Singapore: 800 101 3366
(SK) Slovakia: 0800 606 287
(SI) Slovenija: +800 135 79 135
(FI) Suomi: +800 135 79 135
(SE) Sverige: +800 135 79 135

(CH) Switzerland: +800 135 79 135
(TR) Türkiye: 00800 142 064 866
(GB) United Kingdom: 00800 135 79 135
(US) United States: +1 855 236 0910
(VN) Việt Nam: 122 80297
(BG) България: +800 135 79 135
(RU) Россия: +800 135 79 135
(GR) Ελλάδα: 00800 161 2205 7799
All Other Countries: +31 20 794 7071


Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099 USA © 2019, 2021 Alcon Inc.





Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая Clareon Vivity Toric расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, предустановленная в автоматизированное устройство имплантации AutonoMe, модель CNAET5



Лоток с устройством AutoNoMe, предзагруженной линзой

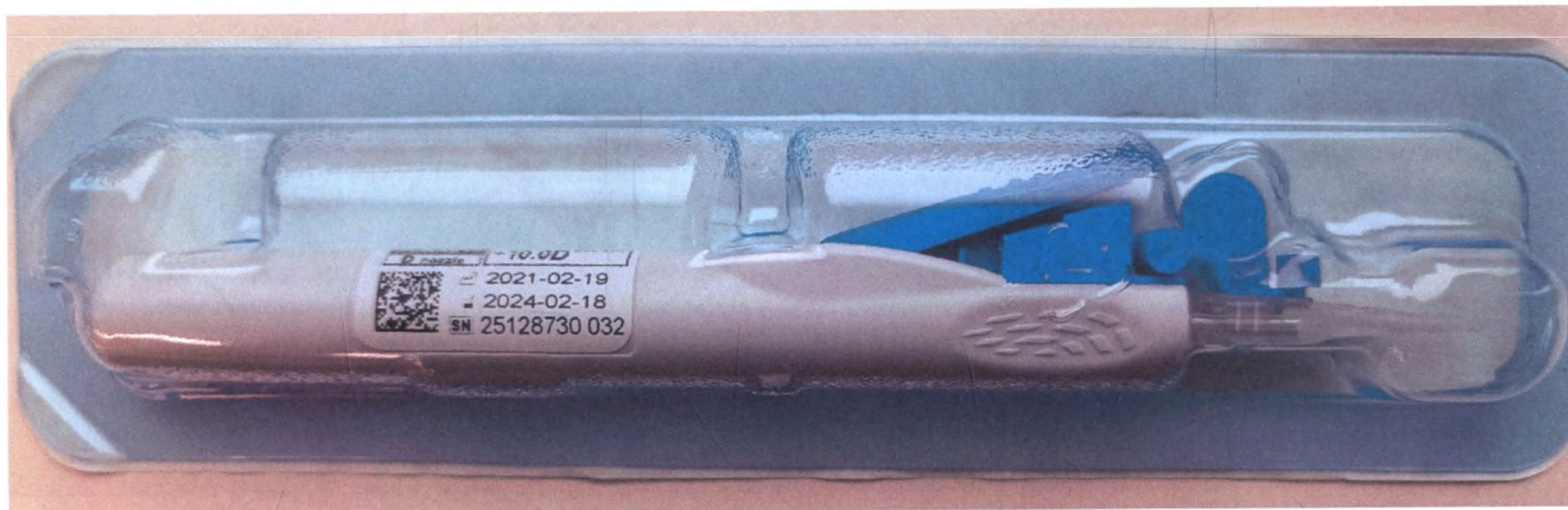

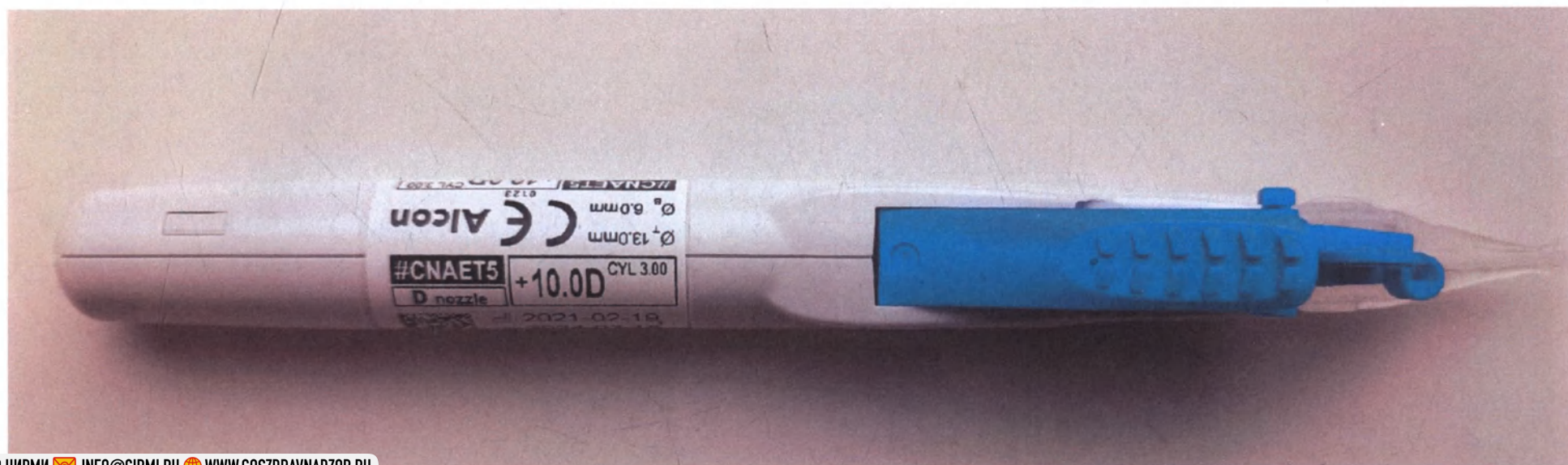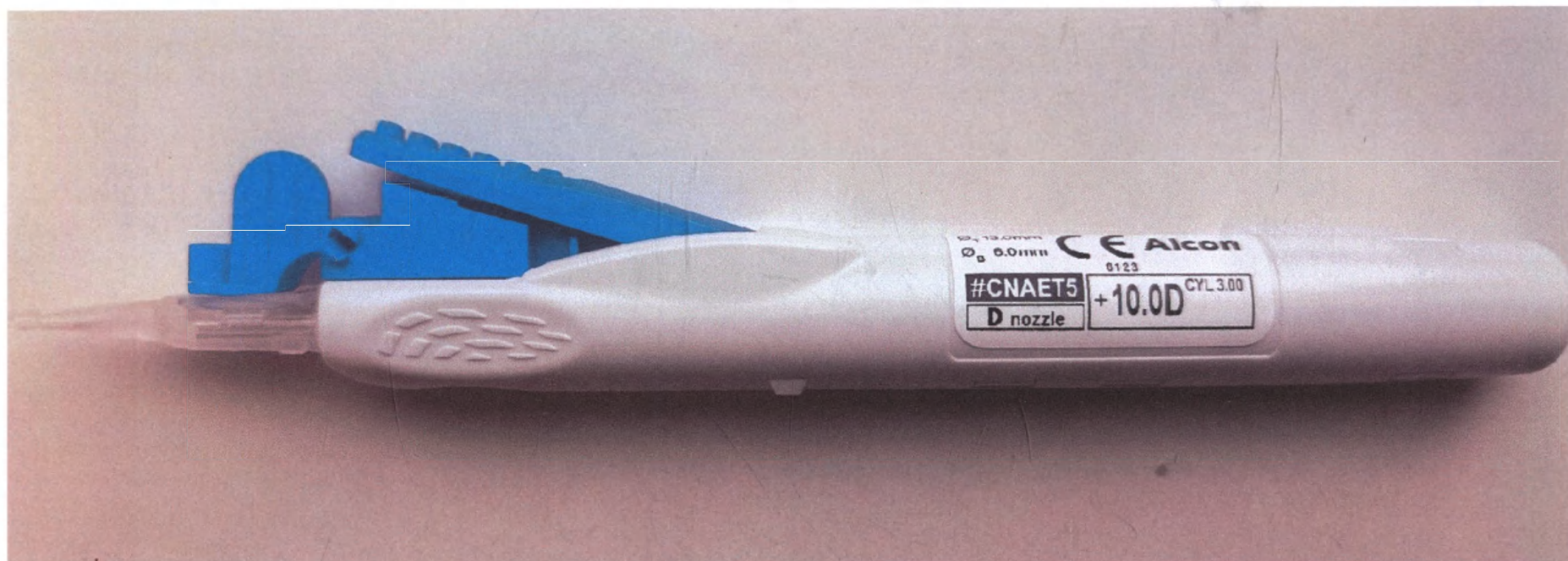





PATIENT LENS IMPLANT CARD

Alcon


Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099 USA

www.ifu.alcon.com



[illegible]

PATIENT INFORMATION															IMPLANTING PHYSICIAN														
Last Name															Last Name														
First Name/ M.I.															First Name/ M.I.														
Surgery Date	M			D			Y													State License #									

RETURN COMPLETED FORM IN PROVIDED POSTAGE PAID ENVELOPE

Billing P.O. #:

Комплект стикеров с информацией об используемой линзе

#CNAET5  **+10.0D** CYL 3.00

Clareon Vivify™ Toric IOL

GTIN 00380652484701

UDI 

UV & BLUE LIGHT FILTER

2024-02-18 Alcon

REF CNAET5.100

SN 25128730 032

Ø₁ 13.0mm
Ø₂ 8.0mm

#CNAET5  Clareon Vivify™ Toric IOL

GTIN 00380652484701

UV & BLUE LIGHT FILTER

2024-02-18 Alcon

+10.0D CYL 3.00

SN 25128730 032

UDI 

Ø₁ 13.0mm
Ø₂ 8.0mm

#CNAET5  **+10.0D** CYL 3.00

Clareon Vivify™ Toric IOL

GTIN 00380652484701

UDI 

UV & BLUE LIGHT FILTER

2024-02-18 Alcon

REF CNAET5.100

SN 25128730 032

Ø₁ 13.0mm
Ø₂ 8.0mm

#CNAET5  Clareon Vivify™ Toric IOL

GTIN 00380652484701

UV & BLUE LIGHT FILTER

2024-02-18 Alcon

+10.0D CYL 3.00

SN 25128730 032

UDI 

Ø₁ 13.0mm
Ø₂ 8.0mm

#CNAET5  **+10.0D** CYL 3.00

Clareon Vivify™ Toric IOL

GTIN 00380652484701

UDI 

UV & BLUE LIGHT FILTER

2024-02-18 Alcon

REF CNAET5.100

SN 25128730 032

Ø₁ 13.0mm
Ø₂ 8.0mm

#CNAET5  Clareon Vivify™ Toric IOL

GTIN 00380652484701

UV & BLUE LIGHT FILTER

2024-02-18 Alcon

+10.0D CYL 3.00

SN 25128730 032

UDI 

Ø₁ 13.0mm
Ø₂ 8.0mm

#CNAET5  Clareon Vivify™ Toric IOL

GTIN 00380652484701

UDI 

UV & BLUE LIGHT FILTER

2024-02-18 Alcon

+10.0D CYL 3.00

SN 25128730 032

REF CNAET5.100

SN 25128730 032

Ø₁ 13.0mm
Ø₂ 8.0mm

L R

AFFIX TO IMPLANT CARD

#CNAET5  Clareon Vivify™ Toric IOL

GTIN 00380652484701

UV & BLUE LIGHT FILTER

2024-02-18 Alcon

+10.0D CYL 3.00

SN 25128730 032

UDI 

Ø₁ 13.0mm
Ø₂ 8.0mm

#CNAET5 **+10.0D** CYL 3.00

SN 25128730 032

**ДАННУЮ ВЕРСИЮ ИНСТРУКЦИИ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая Clareon Vivify Toric расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, предустановленная в автоматизированное устройство имплантации AutonoMe, модели CNAET2, CNAET3 (оптическая сила от +10,0 до +25,0 диоптрий, с шагом 0,5 диоптрий), CNAET4, CNAET5, CNAET6 (оптическая сила от +10,0 до +21,0 диоптрий, с шагом 0,5 диоптрий),

в составе:

- Лоток с устройством AutonoMe, предзагруженным линзой – 1 шт.;
- Имплантационная регистрационная карта – 1 шт. (при необходимости);
- Карточка имплантата пациента – 1 шт.
- Комплект стикеров с информацией об используемой линзе – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Карта со ссылкой на инструкцию по применению в электронном виде – 1 шт.

ОПИСАНИЕ

Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая Clareon Vivify Toric расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE (именуемая далее ИОЛ Clareon Vivify Toric, модели CNWET2, CNWET3, CNWET4, CNWET5 и CNWET6), предустановленная в автоматизированное устройство имплантации AutonoMe (именуемое далее устройство имплантации AutonoMe, модели CNAET2, CNAET3, CNAET4, CNAET5 и CNAET6), что обеспечивает удобную и контролируемую надежную имплантацию ИОЛ в капсульный мешок. Торические ИОЛ Clareon Vivify Toric — это гибкие интраокулярные линзы (ИОЛ) с УФ-фильтром и фильтром синего света. В сравнении с монофокальной ИОЛ данные ИОЛ обеспечивают расширенный диапазон зрения на расстояниях от дальнего до ближнего, при этом для них не характерна повышенная частота развития нарушений зрения. Моноблочная конструкция изготовлена из мягкого гидрофобного акрила с высоким рефракционным индексом и с содержанием запатентованного хромофора, фильтрующего синий свет аналогично хрусталику глаза человека, в диапазоне длин волн от 400 до 475 нм (Boettner and Wolter, 1982). В дополнение к стандартному фильтру УФ-излучения, хромофор, фильтрующий синий свет, снижает пропускание волн синего света. Двояковыпуклая асферическая оптическая часть изготавливается из мягкого акрилового материала с высоким рефракционным индексом, что позволяет сложить линзу и имплантировать ее через разрез меньшего размера, чем диаметр оптической части линзы. После имплантации в глаз линза аккуратно расправляется и восстанавливает свои оптические характеристики. Поддерживающие гаптические элементы обеспечивают правильное расположение и фиксацию оптической части ИОЛ внутри глаза.

Расширенный диапазон глубины поля зрения и профиль нарушений зрения, схожий с аналогичным профилем монофокальных линз, достигаются при помощи элемента с запатентованной технологией формирования волнового фронта X-WAVE, располагающегося на передней поверхности ИОЛ. Подобно монофокальной ИОЛ, технология формирования волнового фронта X-WAVE использует практически всю световую энергию. Применение технологии формирования волнового фронта X-WAVE является идентичной для линз с любой оптической силой. Передняя поверхность ИОЛ Clareon Vivify Toric создана с отрицательной сферической аберрацией для компенсации положительной сферической аберрации усредненной роговицы. Биконическая задняя поверхность линзы обеспечивает ее торичность для коррекции роговичного астигматизма. Плоский меридиан торических ИОЛ Clareon Vivify Toric определяется по углублениям в форме точек на задней поверхности оптической части.

Автоматизированное устройство имплантации ИОЛ AutonoMe представляет собой одноразовое устройство для хранения линзы и инжекторное устройство для ее имплантации. Данное изделие поставляется в полностью собранном виде с ИОЛ, помещенной в отсек для линзы. Устройство имеет рычаг управления скоростью имплантации ИОЛ, который позволяет выполнять ее имплантацию одной рукой. Продвижение ИОЛ осуществляется под действием внутреннего баллончика со сжатым газом, который позволяет контролировать скорость продвижения инжектора путем изменения силы нажатия на рычаг управления скоростью имплантации ИОЛ. Технические характеристики и схематичное изображение торических ИОЛ Clareon Vivify Toric и устройства для имплантации обобщены в таблице 1, а также на рисунках 1, 2 и 3.

129215 Rev. 01

ALCON IOLs

ELECTRONIC INSTRUCTIONS FOR USE

REFERENCE CARD



Alcon

 www.ifu.alcon.com

ENGLISH

To access Instructions for Use:

1. Go to www.ifu.alcon.com
2. Search by product name or model number

 Refer to back page for paper copy requests, to be supplied within 7 days. If country not listed, please dial +31 20 794 7071.

DUTCH

Voor toegang tot de de gebruiksinstructies:

1. Ga naar www.ifu.alcon.com
2. Zoek op productnaam of modelnummer

 Zie achterzijde voor aanpak van een papieren kopie, die binnen 7 dagen geleverd wordt. Indien uw land niet vermeld wordt, kunt u bellen naar het nummer +31 20 794 7071.

HRVATSKI

Za pristup uputama za upotrebu:

1. Idite na www.ifu.alcon.com
2. Pretražite po nativu proizvoda ili broju modela

 Pogledajte zadnju stranicu za zahtjev papirne kopije, biti će dostavljena unutar 7 dana. Ukoliko zemlja nije navedena, molimo nazovite +31 20 794 7071.

ČEŠTINA

Přístup k návodům k použití:

1. Použijte tento link www.ifu.alcon.com
2. Vyhledejte podle názvu výrobku nebo čísla modelu

 Pokud požadujete papírovou kopii návodu k použití, použijte kontaktní na zadní straně. Kopie Vám bude zaslána do 7 dní. Pokud země není uvedena, prosím volejte +31 20 794 7071.

EESTI

Kasutusjuhendi leidmiseks:

1. Mine www.ifu.alcon.com
2. Otsi toote nime või mudeli numbrit järgi

 Paberkoopi saamiseks, mis toimetatakse 7 päeva jooksul, pöördu info lehekülje tagumisel küljel. Kui riiki ei ole loetletud, palun valige +31 20 794 7071.

ÍSLAND

Til að nálgast notkunarléiðbeiningar:

1. Opnaðu www.ifu.alcon.com
2. Leitaðu eftir vöruheitni eða gerðarnúmeri

 Á baksíðunni má finna upplýsingar um að biðja um leiðbeiningar á pappír, sem verða afhentar innan sjö daga. Ef landið er ekki á síðu skalt hringja í síma +31 20 794 7071.

DANSK

Her finder du brugsanvisning:

1. Gå til www.ifu.alcon.com
2. Søg på produktnavn eller modelnummer

 Se bagenden for bestilling af papirudgave, som fremsendes inden for 7 dage. Hvis dit land ikke fremgår, bedes du ringe +31 20 794 7071.

ESPAÑOL

Para acceder a las instrucciones de uso:

1. Ir a www.ifu.alcon.com
2. Buscar por nombre del producto o por el modelo

 Para solicitar una copia en papel, consultar el reverso de la página. Las copias se entregarán en un plazo de 7 días. Si su país no aparece en el listado, por favor, llamar al +31 20 794 7071.

ITALIANO

Per accedere alle istruzioni per l'uso:

1. Andare sul sito www.ifu.alcon.com
2. Cercare per nome prodotto o codice prodotto

 In fondo alla pagina trovi le istruzioni per richiedere una copia cartacea, che sarà fornita entro 7 giorni. Nel caso in cui il Paese non sia presente nell'elenco, si prega di contattare: +31 20 794 7071.

DEUTSCH

Um Gebrauchsanweisungen zu erhalten:

1. Gehen Sie auf die Seite www.ifu.alcon.com
2. Suchen Sie nach Produktname oder Modellnummer

 Für die Anforderung einer Papierversion, die Ihnen innerhalb von 7 Tagen zugesandt wird, siehe Rückseite. Falls ihr Land nicht aufgeführt ist, wählen Sie bitte +31 20 794 7071.

FRANÇAIS

Pour accéder aux instructions d'utilisation:

1. Allez sur le site www.ifu.alcon.com
2. Recherchez par nom de produit ou numéro de modèle

 Reportez-vous à la dernière page pour les demandes de copie papier, à fournir dans les 7 jours. Si le pays ne figure pas dans la liste, veuillez composer le +31 20 794 7071.

ҚАЗАҚ

Пайдалану жөніндегі нұсқаулығына қол жеткізу үшін:

1. www.ifu.alcon.com өтіңіз
2. Өнім атауы немесе үлгі нөмірі бойынша іздеуді пайдаланыңыз

 Қараңіз көшірмесін ұсыну қажет болған жағдайда соңғы бетке жүгініңіз, көшірме 7 күн ішінде ұсынылады. Егер ел тізіміне болмаса, +31 20 794 7071 нөміріне қоңырау шалыңыз.

AR Argentina: +800 135 79 135
AU Australia: +800 135 79 135
BE Belgium: +800 135 79 135
BR Brazil: 0800 591 1055
CA Canada: +1 855 805 8539
CZ Česká Republika: +800 135 79 135
CL Chile: +31 20 794 7071
CO Colombia: +800 135 79 135
CY Cyprus: +800 135 79 135

DK Danmark: +800 135 79 135
DE Deutschland: +800 135 79 135
EC Ecuador: +31 20 794 7071
ES España: +800 135 79 135
EE Eesti: 0800 0100567
FR France: +800 135 79 135
HR Hrvatska: 0800 804 804
IE Ireland: +800 135 79 135
IS Ísland: 800 8996

IT Italia: +800 135 79 135
LV Latvija: +800 135 79 135
LI Liechtenstein: +31 20 796 5692
LT Lietuva: 8000 30728
LU Luxembourg: +800 135 79 135
HU Magyarország: +800 135 79 135
NL Nederland: +800 135 79 135
NZ New Zealand: +800 135 79 135
NO Norge: +800 135 79 135

AT Österreich: +800 135 79 135
PL Polska: +800 135 79 135
PT Portugal: +800 135 79 135
RO România: 0800 895 084
SG Singapore: 800 101 3366
SK Slovakia: 0800 606 287
SI Slovenija: +800 135 79 135
FI Suomi: +800 135 79 135
SE Sverige: +800 135 79 135

CH Switzerland: +800 135 79 135
TR Türkiye: 00800 142 064 866
GB United Kingdom: 00800 135 79 135
US United States: +1 855 236 0910
VN Việt Nam: 122 80297
BG България: +800 135 79 135
RU Россия: +800 135 79 135
GR Ελλάδα: 00800 161 2205 7799

All Other Countries: +31 20 794 7071







Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099 USA © 2019, 2021 Alcon Inc.



300029215

Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая Clareon Vivity Toric расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, предустановленная в автоматизированное устройство имплантации AutonoMe, модель CNAET6

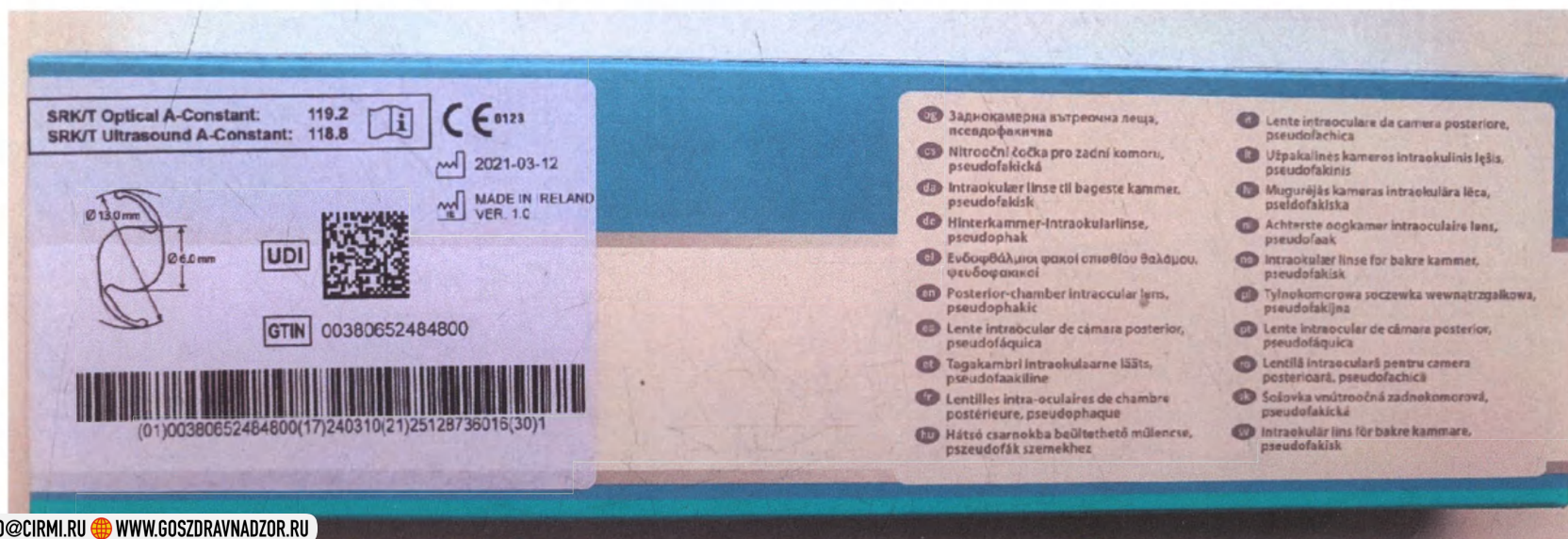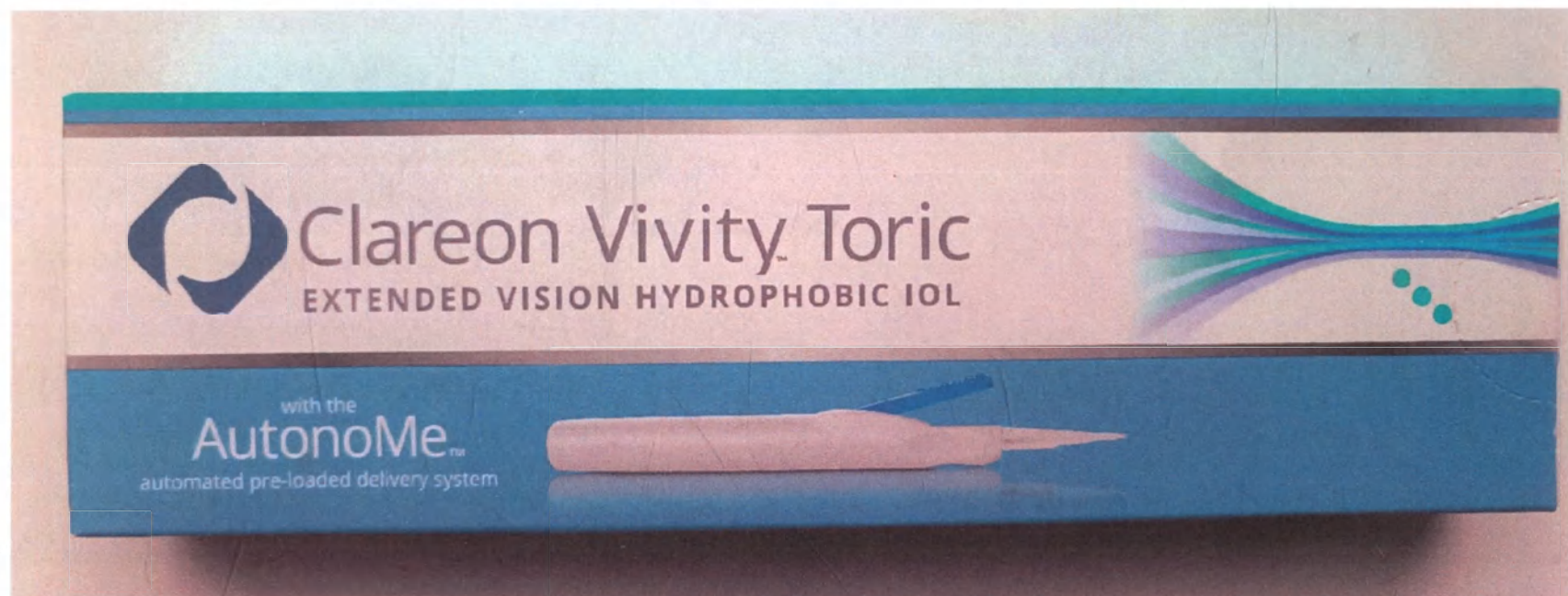

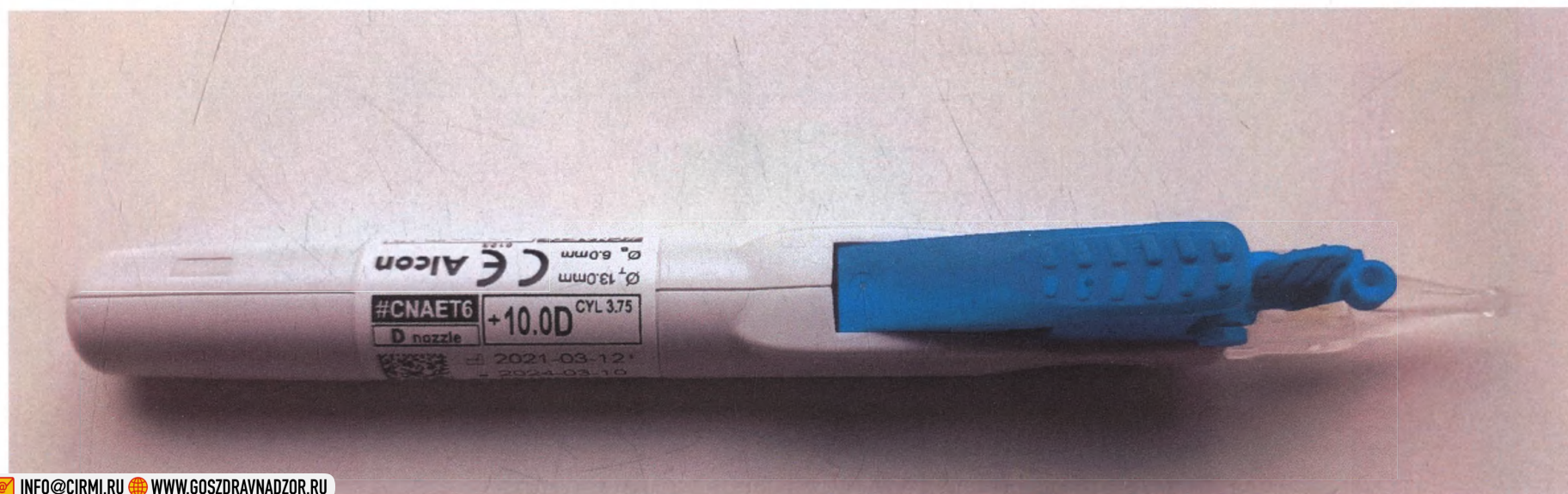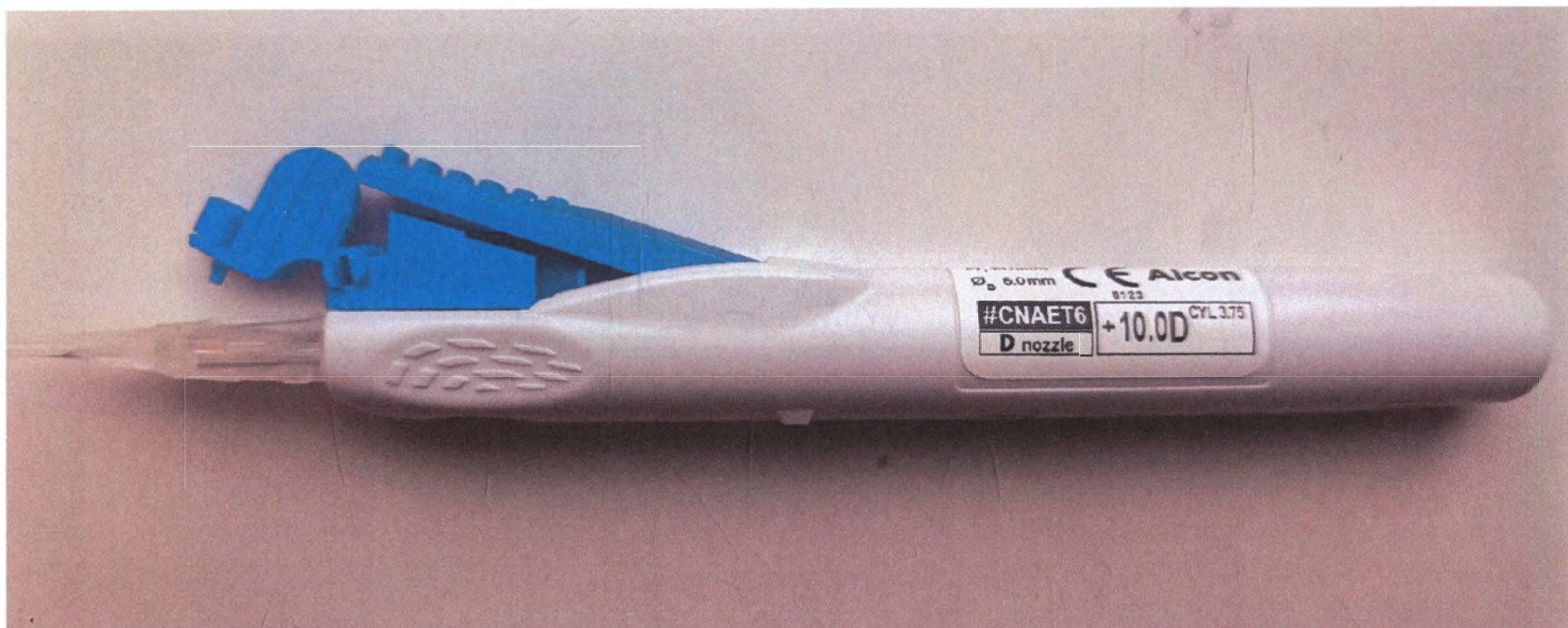





ClareonTM VivityTM Toric IOL MD

PATIENT LENS IMPLANT CARD

Alcon


Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099 USA

www.ifu.alcon.com



Карточка имплантата пациента

#CNAET6
D nozzle

+10.0D

CYL 3.75



SN
25128736 016

IF NO SERIAL NUMBER IS SHOWN, PLEASE WRITE IT HERE :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Alcon

A Novartis Division

40-500-300-NEW

IMPORTANT: FEDERAL REGULATIONS REQUIRE THAT THIS FORM MUST BE COMPLETED AND RETURNED TO ALCON FOR EACH LENS IMPLANTED.

THE INFORMATION PROVIDED ON THIS CARD MAY BE USED FOR BILLING PURPOSES.

PLEASE PRINT

HOSPITAL NAME AND ADDRESS

PATIENT INFORMATION

Last Name

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

First Name/ M.I.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Surgery Date

M O

--

D A Y

--

Y R

--

IMPLANTING PHYSICIAN

Last Name

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

First Name/ M.I.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

State License #

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ETED FORM IN PROVIDED POSTAGE PAID ENVELOPE

Billing P.O. #:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Комплект стикеров с информацией об используемой линзе

#CNAET6  **+10.0D** CYL 3.75

Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652484800

UDI 

Ø 13.0mm
Ø 6.0mm

2024-03-10 Alcon

REF CNAET6.100

SN 25128736 016

UV & BLUE LIGHT FILTER

#CNAET6  Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652484800

Ø 13.0mm
Ø 6.0mm

2024-03-10 Alcon

+10.0D CYL 3.75

SN 25128736 016

UDI 

UV & BLUE LIGHT FILTER

#CNAET6  **+10.0D** CYL 3.75

Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652484800

UDI 

Ø 13.0mm
Ø 6.0mm

2024-03-10 Alcon

REF CNAET6.100

SN 25128736 016

UV & BLUE LIGHT FILTER

#CNAET6  Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652484800

Ø 13.0mm
Ø 6.0mm

2024-03-10 Alcon

+10.0D CYL 3.75

SN 25128736 016

UDI 

UV & BLUE LIGHT FILTER

#CNAET6  **+10.0D** CYL 3.75

Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652484800

UDI 

Ø 13.0mm
Ø 6.0mm

2024-03-10 Alcon

REF CNAET6.100

SN 25128736 016

UV & BLUE LIGHT FILTER

#CNAET6  Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652484800

Ø 13.0mm
Ø 6.0mm

2024-03-10 Alcon

+10.0D CYL 3.75

SN 25128736 016

UDI 

UV & BLUE LIGHT FILTER

#CNAET6 Clareon Vivivity™ Toric IOL 

+10.0D CYL 3.75

UDI 

GTIN 00380652484800

Ø 13.0mm
Ø 6.0mm

2024-03-10 Alcon

REF CNAET6.100

SN 25128736 016

UV & BLUE LIGHT FILTER

13 AFFIX TO IMPLANT CARD

#CNAET6  Clareon Vivivity™ Toric IOL

GTIN 00380652484800

Ø 13.0mm
Ø 6.0mm

2024-03-10 Alcon

+10.0D CYL 3.75

SN 25128736 016

UDI 

UV & BLUE LIGHT FILTER

**ДАННУЮ ВЕРСИЮ ИНСТРУКЦИИ СЧИТАТЬ ПРИОРИТЕТНОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая Clareon Vivity Toric расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, предустановленная в автоматизированное устройство имплантации AutonoMe, модели CNAET2, CNAET3 (оптическая сила от +10,0 до +25,0 диоптрий, с шагом 0,5 диоптрий), CNAET4, CNAET5, CNAET6 (оптическая сила от +10,0 до +21,0 диоптрий, с шагом 0,5 диоптрий),

в составе:

- Лоток с устройством AutonoMe, предзагруженным линзой – 1 шт.;
- Имплантационная регистрационная карта – 1 шт. (при необходимости);
- Карточка имплантата пациента – 1 шт.
- Комплект стикеров с информацией об используемой линзе – 1 шт.;
- Инструкция по применению – 1 шт.;
- Карта со ссылкой на инструкцию по применению в электронном виде – 1 шт.

ОПИСАНИЕ

Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая Clareon Vivity Toric расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE (именуемая далее ИОЛ Clareon Vivity Toric, модели CNWET2, CNWET3, CNWET4, CNWET5 и CNWET6), предустановленная в автоматизированное устройство имплантации AutonoMe (именуемое далее устройство имплантации AutonoMe, модели CNAET2, CNAET3, CNAET4, CNAET5 и CNAET6), что обеспечивает удобную и контролируемую надежную имплантацию ИОЛ в капсульный мешок. Торические ИОЛ Clareon Vivity Toric — это гибкие интраокулярные линзы (ИОЛ) с УФ-фильтром и фильтром синего света. В сравнении с монофокальной ИОЛ данные ИОЛ обеспечивают расширенный диапазон зрения на расстояниях от дальнего до ближнего, при этом для них не характерна повышенная частота развития нарушений зрения. Моноблочная конструкция изготовлена из мягкого гидрофобного акрила с высоким рефракционным индексом и с содержанием запатентованного хромофора, фильтрующего синий свет аналогично хрусталику глаза человека, в диапазоне длин волн от 400 до 475 нм (Boettner and Wolter, 1962). В дополнение к стандартному фильтру УФ-излучения, хромофор, фильтрующий синий свет, снижает пропускание волн синего света. Двояковыпуклая асферическая оптическая часть изготавливается из мягкого акрилового материала с высоким рефракционным индексом, что позволяет сложить линзу и имплантировать ее через разрез меньшего размера, чем диаметр оптической части линзы. После имплантации в глаз линза аккуратно расправляется и восстанавливает свои оптические характеристики. Поддерживающие гаттические элементы обеспечивают правильное расположение и фиксацию оптической части ИОЛ внутри глаза.

Расширенный диапазон глубины поля зрения и профиль нарушений зрения, схожий с аналогичным профилем монофокальных линз, достигаются при помощи элемента с запатентованной технологией формирования волнового фронта X-WAVE, располагающегося на передней поверхности ИОЛ. Подобно монофокальной ИОЛ, технология формирования волнового фронта X-WAVE использует практически всю световую энергию. Применение технологии формирования волнового фронта X-WAVE является идентичной для линз с любой оптической силой. Передняя поверхность ИОЛ Clareon Vivity Toric создана с отрицательной сферической аберрацией для компенсации положительной сферической аберрации усредненной роговицы. Биконическая задняя поверхность линзы обеспечивает ее торичность для коррекции роговичного астигматизма. Плоский меридиан торических ИОЛ Clareon Vivity Toric определяется по углублениям в форме точек на задней поверхности оптической части.

Автоматизированное устройство имплантации ИОЛ AutonoMe представляет собой одноразовое устройство для хранения линзы и инжекторное устройство для ее имплантации. Данное изделие поставляется в полностью собранном виде с ИОЛ, помещенной в отсек для линзы. Устройство имеет рычаг управления скоростью имплантации ИОЛ, который позволяет выполнять ее имплантацию одной рукой. Продвижение ИОЛ осуществляется под действием внутреннего баллончика со сжатым газом, который позволяет контролировать скорость продвижения инжектора путем изменения силы нажатия на рычаг управления скоростью имплантации ИОЛ. Технические характеристики и схематичное изображение торических ИОЛ Clareon Vivity Toric и устройства для имплантации обобщены в таблице 1, а также на рисунках 1, 2 и 3.

ALCON IOLs

ELECTRONIC INSTRUCTIONS FOR USE

REFERENCE CARD

Alcon

 www.ifu.alcon.com

ENGLISH

To access Instructions for Use:

- Go to www.ifu.alcon.com
- Search by product name or model number

 Refer to back page for paper copy request, to be supplied within 7 days. If country not listed, please dial +31 20 794 7071.

DUTCH

Voor toegang tot de gebruiksinstructies:

- Ga naar www.ifu.alcon.com
- Zoek op productnaam of modelnummer

 Zie achterzijde voor aanvraag van een papieren kopie, die binnen 7 dagen geleverd wordt. Indien uw land niet vermeld wordt, kunt u bellen naar het nummer +31 20 794 7071.

HRVATSKI

Za pristup uputama za upotrebu:

- Idite na www.ifu.alcon.com
- Pretražite po nazivu proizvoda ili broju modela

 Pogledajte zadnju stranicu za zahtjev papirnatu kopiju, biti će dostavljena unutar 7 dana. Ukoliko zemlja nije navedena, molimo nazovite +31 20 794 7071.

ČEŠTINA

Přístup k návodu k použití:

- Použijte tento link www.ifu.alcon.com
- Vyhledejte podle názvu výrobku nebo čísla modelu

 Pokud požádáte papírovou kopii návodu k použití, použijte kontaktní na zadní straně. Kopie Vám bude zaslána do 7 dní. Pokud země není uvedena, prosíme zavolat +31 20 794 7071.

EESTI

Kasutusjuhendi leidmiseks:

- Mine www.ifu.alcon.com
- Otsi toote nime või mudeli numbrit järgi

 Paberkoopiate, mis toimetatakse 7 päeva jooksul, päringu info leiate tagumisel küljel. Kui riiki ei ole loetletud, palun valige +31 20 794 7071.

ÍSLAND

Til að nálgast notkunarléiðbeiningar:

- Opnaðu www.ifu.alcon.com
- Leitaðu eftir vöruneiti eða gerðarnúmeri

 Á baksíðinni má finna upplýsingar til að biðja um leiðbeiningar á pappír, sem verða afhentar innan sjo daga. Ef landið er ekki á skrá skal hringja í síma +31 20 794 7071.

DANSK

Her finder du brugsanvisning:

- Gå til www.ifu.alcon.com
- Søg på produktnavn eller modelnummer

 Se bagenden for beskrivelse af papirudgave, som fremsendes inden for 7 dage. Hvis dit land ikke fremgår, bedes du ringe +31 20 794 7071.

ESPAÑOL

Para acceder a las instrucciones de uso:

- Ir a www.ifu.alcon.com
- Buscar por nombre del producto o por el modelo

 Para solicitar una copia en papel, consultar el reverso de la página. Las copias se entregarán en un plazo de 7 días. Si su país no aparece en el listado, por favor, llamar al +31 20 794 7071.

ITALIANO

Per accedere alle istruzioni per l'uso:

- Andare sul sito www.ifu.alcon.com
- Cercare per nome prodotto o codice prodotto

 In fondo alla pagina trovi le istruzioni per richiedere una copia cartacea, che sarà fornita entro 7 giorni. Nel caso in cui il Paese non sia presente nell'elenco, si prega di contattare: +31 20 794 7071.

DEUTSCH

Um Gebrauchsanweisungen zu erhalten:

- Gehen Sie auf die Seite www.ifu.alcon.com
- Suchen Sie nach Produktname oder Modellnummer

 Für die Anforderung einer Papierversion, die Ihnen innerhalb von 7 Tagen zugesandt wird, siehe Rückseite. Falls Ihr Land nicht aufgeführt ist, wählen Sie bitte +31 20 794 7071.

FRANÇAIS

Pour accéder aux instructions d'utilisation:

- Allez sur le site www.ifu.alcon.com
- Recherchez par nom de produit ou numéro de modèle

 Reportez-vous à la dernière page pour les demandes de copie papier, à fournir dans les 7 jours. Si le pays ne figure pas dans la liste, veuillez composer le +31 20 794 7071.

ҚАЗАҚ

Пайдалану жөніндегі нұсқаулығына қол жеткізу үшін:

- www.ifu.alcon.com әтиңіз
- Өнім атауы немесе үлгі нөмірі бойынша іздеуді пайдаланыңыз

 Құжат көшірмесін ұсыну қажет болған жағдайда сұраныс біткен жерінен бастап, 7 күн ішінде ұсынылады. Егер өл тізімде болмаса, +31 20 794 7071 нөміріне хаттау жасаңыз.

ARGENTINA: +800 135 79 135

AUSTRALIA: +800 135 79 135

BELGIUM: +800 135 79 135

BRAZIL: 0800 591 1055

CANADA: +1 855 805 8539

ČESKÁ REPUBLIKA: +800 135 79 135

CHILE: +31 20 794 7071

COLOMBIA: +800 135 79 135

CYPRUS: +800 135 79 135

DANMARK: +800 135 79 135

DEUTSCHLAND: +800 135 79 135

ECUADOR: +31 20 794 7071

ESPAÑA: +800 135 79 135

EESTI: 0800 0100567

FRANCE: +800 135 79 135

HRVATSKA: 0800 804 804

IRELAND: +800 135 79 135

ISLAND: 800 8996

ITALIA: +800 135 79 135

LATVIJA: +800 135 79 135

LIECHTENSTEIN: +31 20 796 5692

LIETUVA: 8800 30728

LUXEMBOURG: +800 135 79 135

MAGYARORSZÁG: +800 135 79 135

NEDERLAND: +800 135 79 135

NEW ZEALAND: +800 135 79 135

NORGE: +800 135 79 135

ÖSTERREICH: +800 135 79 135

POLSKA: +800 135 79 135

PORTUGAL: +800 135 79 135

ROMÂNIA: 0800 895 084

SINGAPORE: 800 101 3366

SLOVAKIA: 0800 606 287

SLOVENIJA: +800 135 79 135

SUOMI: +800 135 79 135

SVERIGE: +800 135 79 135

SWITZERLAND: +800 135 79 135

TÜRKİYE: 00800 142 064 866

UNITED KINGDOM: 0800 135 79 135

UNITED STATES: +1 855 236 0910

VIỆT NAM: 122 80297

БЪЛГАРИЯ: +800 135 79 135

РОССИЯ: +800 135 79 135

ΕΛΛΑΔΑ: 00800 161 2205 7799

All Other Countries: +31 20 794 7071

Alcon Laboratories, Inc.

6201 South Freeway

Fort Worth, TX 76134-2099 USA

© 2019, 2021 Alcon, Inc.

300029215

ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

59 ЛИСТА(ОВ)

Волкова Д.О.



УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по регистрации медицинских изделий

ООО «Алкон Фармацевтика»

Волкова Д.О.



«04» апреля 2023 г.

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная Clareon Vivity
расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE, предустановленная в
автоматизированное устройство имплантации AutoNoMe**

в различных вариантах исполнения.

Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная Clareon
Vivity расширенного диапазона зрения с технологией X-WAVE,
предустановленная в автоматизированное устройство
имплантации AutonoMe, модель CNAET0
СТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

**НЕ использовать, если целостность стерильных компонентов упаковки нарушена
ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**
1 шт.

Производитель:

«Алкон Лабораториз, Инк.», США,
Alcon Laboratories, Inc.,
6201 South Freeway, Fort Worth,
TX 76134-2099, USA.

Место производства:

Ирландия

Регистрационное удостоверение

№ XXX XXXX/XXXX

Условия хранения: хранить при температуре
от +15°C до +30°C.

Уполномоченный представитель

производителя на территории
Российской Федерации/импортер/
организация, принимающая претензии
на территории Республики Беларусь:
ООО «Алкон Фармацевтика».

125315, г. Москва,
просп. Ленинградский, д. 72, корп. 3.
Тел.: +7 (495) 961-13-33

Серийный номер  :/ Использовать до



см. упаковку.

Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая
Clareon Vivity Toric расширенного диапазона зрения с технологией
X-WAVE, предустановленная в автоматизированное устройство
имплантации AutonoMe, модель SNAET2
СТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

НЕ использовать, если целостность стерильных компонентов упаковки
нарушена
ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1 шт.

Производитель:

«Алкон Лабораториз, Инк.», США,
Alcon Laboratories, Inc.,
6201 South Freeway, Fort Worth,
TX 76134-2099, USA.

Место производства:

Ирландия

Регистрационное удостоверение
№ XXX XXXX/XXXX

Условия хранения: хранить при
температуре от +15°C до +30°C.

Уполномоченный представитель
производителя на территории
Российской Федерации/импортер/
организация, принимающая
претензии на территории
Республики Беларусь:

ООО «Алкон Фармацевтика».

125315, г. Москва,
просп. Ленинградский, д. 72, корп.
3.

Тел.: +7 (495) 961-13-33

Серийный номер  :/

Использовать до :

см. упаковку.

Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая
Clareon Vivity Toric расширенного диапазона зрения с технологией
X-WAVE, предустановленная в автоматизированное устройство
имплантации AutonoMe, модель CNAET3
СТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

НЕ использовать, если целостность стерильных компонентов упаковки
нарушена

ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1 шт.

Производитель:

«Алкон Лабораториз, Инк.», США,
Alcon Laboratories, Inc.,
6201 South Freeway, Fort Worth,
TX 76134-2099, USA.

Место производства:

Ирландия

Регистрационное удостоверение
№ XXX XXXX/XXXX

Условия хранения: хранить при
температуре от +15°C до +30°C.

Уполномоченный представитель
производителя на территории
Российской Федерации/импортер/
организация, принимающая
претензии на территории
Республики Беларусь:

ООО «Алкон Фармацевтика».

125315, г. Москва,

просп. Ленинградский, д. 72, корп.
3.

Тел.: +7 (495) 961-13-33

Серийный номер  :/

Использовать до  :

см. упаковку.

Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая
Clareon Vivity Toric расширенного диапазона зрения с технологией
X-WAVE, предустановленная в автоматизированное устройство
имплантации AutonoMe, модель SNAET4
СТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

**НЕ использовать, если целостность стерильных компонентов упаковки нарушена
ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

1 шт.

Производитель:

«Алкон Лабораториз, Инк.», США,
Alcon Laboratories, Inc.,
6201 South Freeway, Fort Worth,
TX 76134-2099, USA.

Место производства:

Ирландия

Регистрационное удостоверение
№ XXX XXXX/XXXX

Условия хранения: хранить при
температуре от +15°C до +30°C.

Уполномоченный представитель
производителя на территории
Российской Федерации/импортер/
организация, принимающая претензии
на территории Республики Беларусь:
ООО «Алкон Фармацевтика».
125315, г. Москва,
просп. Ленинградский, д. 72, корп. 3.
Тел.: +7 (495) 961-13-33

Серийный номер  :/ Использовать до
:
см. упаковку.

Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая
Clareon Vivity Toric расширенного диапазона зрения с технологией
X-WAVE, предустановленная в автоматизированное устройство
имплантации AutonoMe, модель CNAET5
СТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

НЕ использовать, если целостность стерильных компонентов упаковки нарушена
ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1 шт.

Производитель:

«Алкон Лабораториз, Инк.», США,
Alcon Laboratories, Inc.,
6201 South Freeway, Fort Worth,
TX 76134-2099, USA.

Место производства:

Ирландия

Регистрационное удостоверение
№ XXX XXXX/XXXX

Условия хранения: хранить при
температуре от +15°C до +30°C.

Уполномоченный представитель
производителя на территории
Российской Федерации/импортер/
организация, принимающая претензии
на территории Республики Беларусь:
ООО «Алкон Фармацевтика».
125315, г. Москва,
просп. Ленинградский, д. 72, корп. 3.
Тел.: +7 (495) 961-13-33

Серийный номер  :/ Использовать до
:
см. упаковку.

Линза интраокулярная недифракционная гидрофобная торическая
Clareon Vivity Toric расширенного диапазона зрения с технологией
X-WAVE, предустановленная в автоматизированное устройство
имплантации AutonoMe, модель SNAET6
СТЕРИЛЬНО. НЕТОКСИЧНО.

НЕ использовать, если целостность стерильных компонентов упаковки нарушена
ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1 шт.

Производитель:

«Алкон Лабораториз, Инк.», США,
Alcon Laboratories, Inc.,
6201 South Freeway, Fort Worth,
TX 76134-2099, USA.

Место производства:

Ирландия

Регистрационное удостоверение
№ XXX XXXX/XXXX

Условия хранения: хранить при
температуре от +15°C до +30°C.

Уполномоченный представитель
производителя на территории
Российской Федерации/импортер/
организация, принимающая претензии
на территории Республики Беларусь:
ООО «Алкон Фармацевтика».
125315, г. Москва,
просп. Ленинградский, д. 72, корп. 3.
Тел.: +7 (495) 961-13-33

Серийный номер  :/ Использовать до
:
см. упаковку.

ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ
ЛИСТА(ОВ)

Волкова Д.О.