


Фотографические изображения образца медицинского изделия

Набор реагентов для бактериологических исследований «Дифференциально-селективная питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая (Гектоеновый энтеро-агар)» по ТУ 20.59.52-375-78095326- 2023

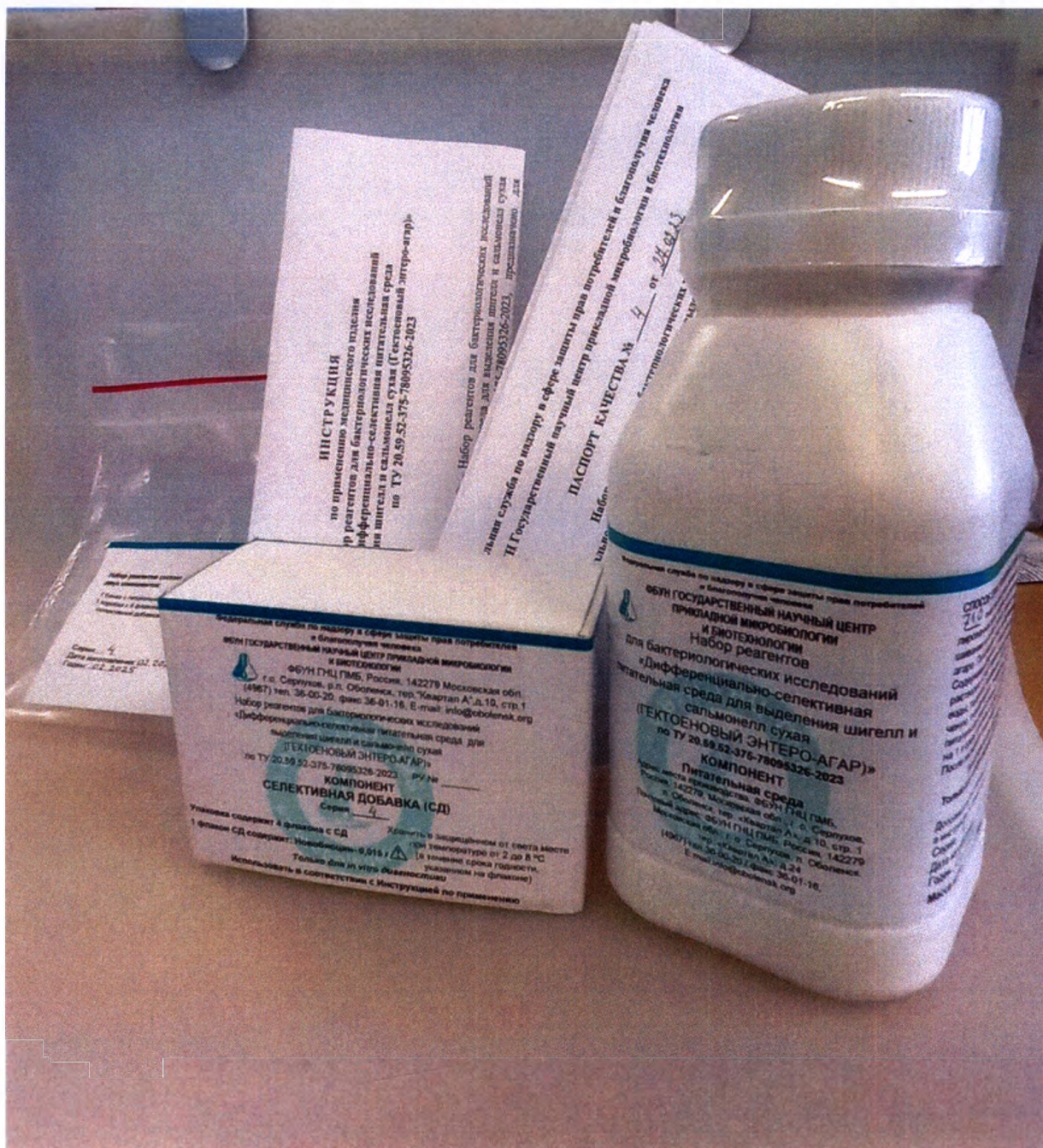

Комплектация набора

Директор



И.А.Дятлов



Внешний вид изделия в общей упаковке


**Внешний вид упаковки (лицевая сторона) компонента
Питательная среда**





Внешний вид упаковки (вид справа) компонента
Питательная среда



Внешний вид упаковки (вид слева) компонента
Питательная среда

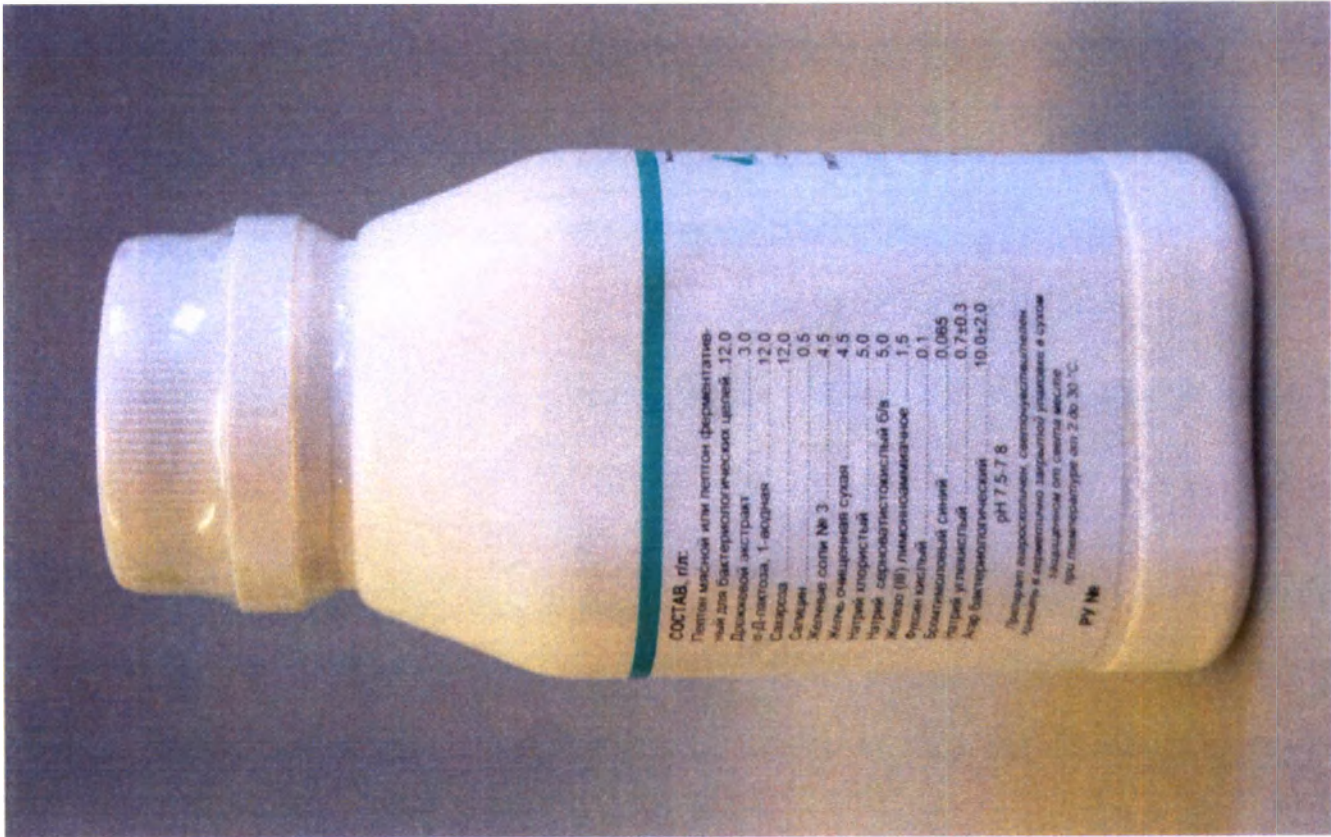

Внешний вид упаковки компонента Селективная добавка (СД)

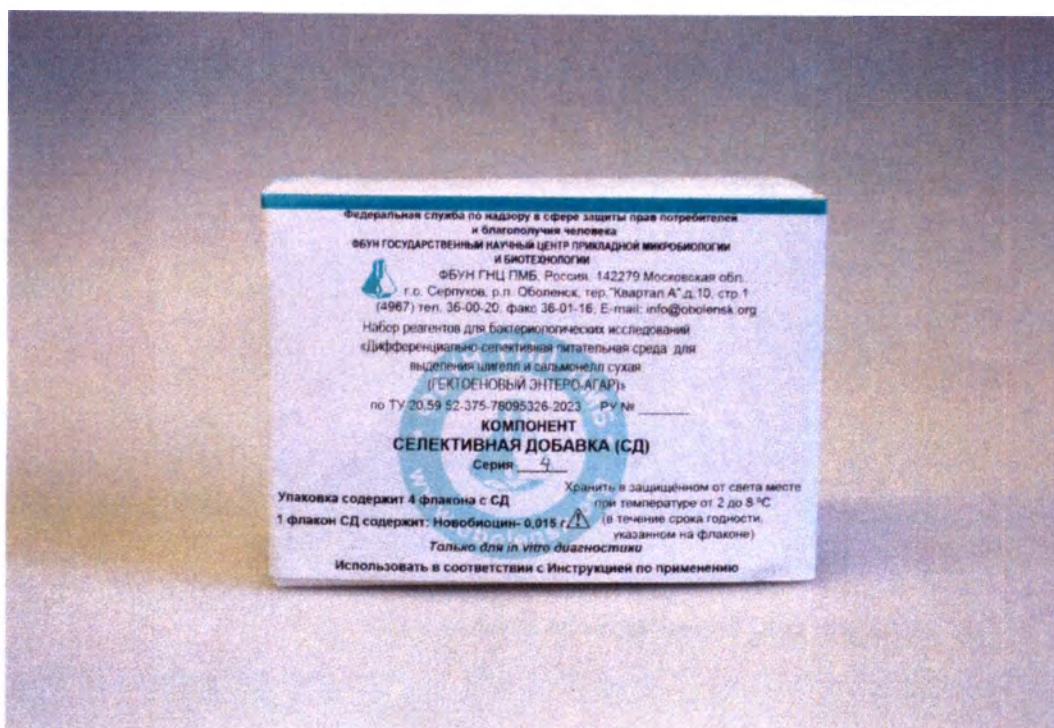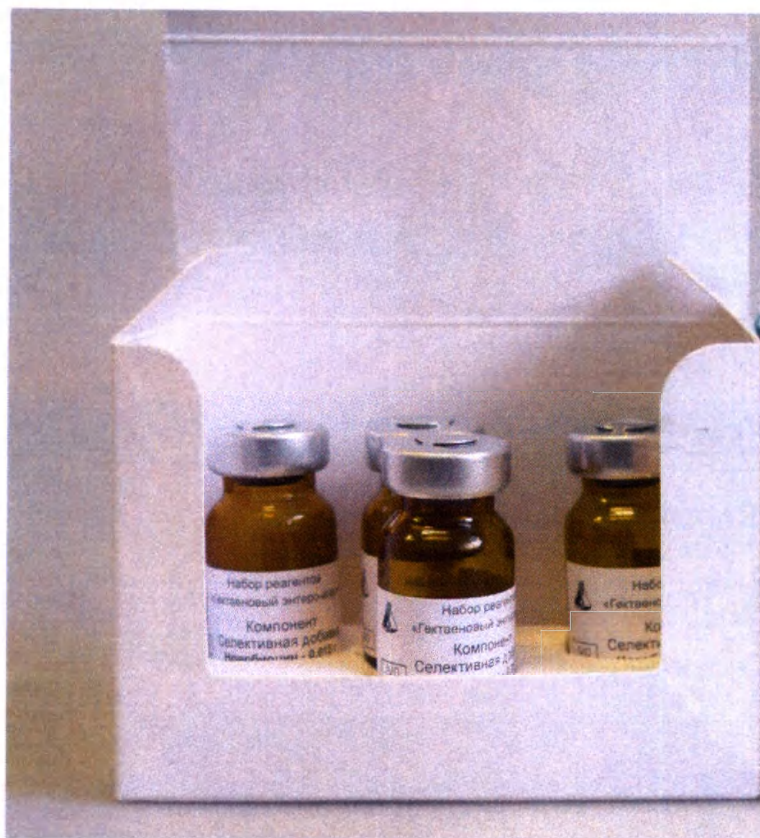



Флаконы с селективной добавкой (вид слева)



Флаконы с селективной добавкой (вид справа)

6 (шесть)

H. B. Marks & Co.

"20" октября 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора ФБУН ГНЦ ПМБ

М.В.Храмов

2023 г.



ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ УПАКОВКИ КОМПОНЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для бактериологических исследований «Дифференциально-селективная питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая (ГЕКТОЕНОВЫЙ ЭНТЕРО-АГАР)» по ТУ 20.59.52-375-78095326-2023

Набор реагентов состоит из двух компонентов:

- 1 банка с питательной средой
- 1 коробка с 4 флаконами с селективной добавкой (СД)

Серия.....

Дата изготовления:....

Годен:.....

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека



ФБУН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ
И БИОТЕХНОЛОГИИ

Набор реагентов

для бактериологических исследований

**«Дифференциально-селективная
питательная среда для выделения шигелл и
сальмонелл сухая
(ГЕКТОЕНОВЫЙ ЭНТЕРО-АГАР)»**

по ТУ 20.59.52-375-78095326-2023

РУ №

Адрес места производства: ФБУН ГНЦ ПМБ,
Россия, 142279, Московская обл., г. о. Серпухов,
п. Оболенск, тер. «Квартал А», д. 10, стр. 1
Почтовый адрес: ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия, 142279
Московская обл., г. о. Серпухов, п. Оболенск,
тер. «Квартал А», д. 24
(4967) тел. 36-00-20 / факс: 36-01-16,
E.mail: info@obolensk.org

При получении разукладывать в соответствии с указанными температурами хранения:

– банку с питательной средой хранить на складе, в сухом защищенном от света месте при температуре от 2 до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 60 %;

– коробку с флаконами СД хранить в холодильнике при температуре от 2 до 8 °С.
Допускается хранить Набор реагентов «Гектоеновый энтеро-агар» во внешней упаковке производителя (пакете) без разукладывания в холодильнике при температуре от 2 °С до 8 °С

Только для in vitro диагностики

Только для профессионального использования

Дополнительная информация приведена в инструкции по применению.

ОБРАЗЕЦ МАРКИРОВКИ ОБЩЕЙ УПАКОВКИ (ПАКЕТ)

СОСТАВ, г/л:

Пептон мясной или пептон ферментативный для бактериологических целей	12,0
Дрожжевой экстракт	3,0
α -Д-лактоза, 1-водная	12,0
Сахароза	12,0
Салицин	0,5
Желчные соли № 3	4,5
Желчь очищенная сухая	4,5
Натрий хлористый	5,0
Натрий серноватистокислый б/в	5,0
Железо (III) лимонноаммиачное	1,5
Фуксин кислый	0,1
Бромтимоловый синий	0,065
Натрий углекислый	0,7±0,3
Агар бактериологический	10,0±2,0
pH 7,5-7,8	

Препарат гигроскопичен, светочувствителен.
Хранить в герметично закрытой упаковке в сухом защищенном от света месте при температуре от 2 до 30 °С.

РУ №

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека



ФБУН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ

И БИОТЕХНОЛОГИИ
Набор реагентов

для бактериологических исследований

«Дифференциально-селективная

питательная среда для выделения шигелл и

сальмонелл сухая

(ГЕКТОЕНОВЫЙ ЭНТЕРО-АГАР)»

по ТУ 20.59.52-375-78095326-2023

КОМПОНЕНТ

Питательная среда

Адрес места производства: ФБУН ГНЦ ПМБ,
Россия, 142279, Московская обл., г. о. Серпухов,
п. Оболенск, тер. «Квартал А», д. 10, стр. 1
Почтовый адрес: ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия, 142279
Московская обл., г. о. Серпухов, п. Оболенск,
тер. «Квартал А», д. 24
(4967) тел 36-00-20 / факс 36-01-16,
E.mail: info@obolensk.org

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СРЕДЫ с СД:

_____ питательной среды размешать в 1 л дистиллированной воды, кипятить при постоянном помешивании не более 2 мин до полного расплавления агара. Питательную среду **не автоклавируют!** Содержимое флакона с селективной добавкой растворить в 5 мл стерильной дистиллированной воды, тщательно перемешать, внести в прокипяченную, охлажденную до температуры 50-55°С питательную среду из расчета 5 мл раствора СД на 1 л среды и разлить в стерильные чашки Петри. После застывания среды чашки подсушить.

Только для *in vitro* диагностики

Только для профессионального использования

Дополнительная информация приведена в инструкции по применению.

Серия.....

Дата изготовления:....

Годен:.....

Масса нетто **250 г**

ОБРАЗЕЦ МАРКИРОВКИ НА БАНКУ
(КОМПОНЕНТ ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
ФБУН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ
И БИОТЕХНОЛОГИИ



ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия, 142279 Московская обл.,
г.о. Серпухов, р.п. Оболенск, тер. "Квартал А" д.10, стр.1
(4967) тел. 36-00-20, факс 36-01-16, E-mail: info@obolensk.org

Набор реагентов для бактериологических исследований
«Дифференциально-селективная питательная среда для
выделения шигелл и сальмонелл сухая
(ГЕКТОЕНОВЫЙ ЭНТЕРО-АГАР)»

по ТУ 20.59.52-375-78095326-2023 РУ № _____

КОМПОНЕНТ
СЕЛЕКТИВНАЯ ДОБАВКА (СД)

Серия _____

Упаковка содержит 4 флакона с СД

1 флакон СД содержит: Новобиоцин - 0,015 г

Хранить в защищенном от света месте
при температуре от 2 до 8 °С
(в течение срока годности,
указанном на флаконе)

Только для *in vitro* диагностики

Использовать в соответствии с Инструкцией по применению

ОБРАЗЕЦ МАРКИРОВКИ НА КОРОБКУ
(КОМПОНЕНТ СЕЛЕКТИВНАЯ ДОБАВКА)



Набор реагентов
«Гектаэновый энтеро-агар»

Компонент

Селективная добавка
Новобиоцин - 0,015 г

IVD

Серия
Годен

ОБРАЗЕЦ МАРКИРОВКИ НА ФЛАКОН
(КОМПОНЕНТ СЕЛЕКТИВНАЯ ДОБАВКА)

Пронумеровано, прошнуровано,
креплено подписью и печатью

3 (три)

Листов. Подпись

20 " октября 2023 г.

