


научно-производственная фирма
Литех

01651-РВ-60 ООО НПФ "Литех"
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 3
Набор реагентов для выявления и дифференциации
ДНК бактерий, ассоциированных с бактериальным вагинозом,
методом полимеразной цепной реакции
КОМПЛЕКС ФЕМОСКРИН-БВ
ТУ 21.20.23-751-17253567-2021 РЗН
НЕРАСКАПАННЫЙ-РВ-60
Для профессионального применения
Обратитесь к инструкции по применению на www.lytech.ru
Хранить при -18...-20°C Серия: 01/651/21
Транспортировать при -18...-20°C Годен до: 27.05.22
Только для in vitro диагностики

www.lytech.ru • (495) 258-39-47

научно-производственная фирма
Литех

Серия: 01/651/21
Дата изготовления: 27.05.21
Годен до: 27.05.22

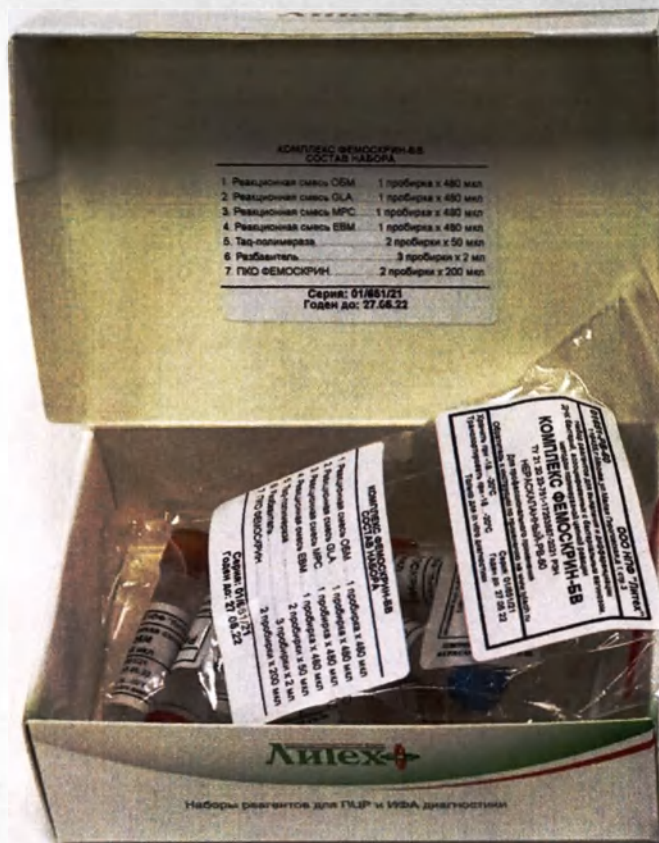

Вкладыш
к набору КОМПЛЕКС ФЕМОСКРИН-БВ
Номер серии набора: 01/651/21

ПКО ФЕМОСКРИН представляет собой количественно
охарактеризованную смесь ДНК-калибраторов (образцы ДНК-
мишеней микроорганизмов, ассоциированных с бактериальным
вагинозом, и человека).

Наименование	Концентрация	Допустимый
--------------	--------------	------------



ПАМЯТКА
по применению набора реагентов
для выявления и дифференциации ДНК бактерий,
ассоциированных с бактериальным вагинозом,
методом полимеразной цепной реакции
КОМПЛЕКС ФЕМОСКРИН-БВ
Комплектация НЕРАСКАПАНЫЙ-РВ-60.

Набор реагентов КОМПЛЕКС ФЕМОСКРИН-БВ комплектации НЕРАСКАПАНЫЙ-РВ-60 предназначен для одновременного выявления, дифференциации и количественного определения ДНК *Akrobium vaginiae*, *Prevotella spp.*, *Bacterial Vaginosis-Associated Bacteria 2*, *Lactobacillus spp.*, *Mobiluncus curtisi*, *Megasphaera type 1*, *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans*, *Eggerthella spp.* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридоанализом-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот (НК), выделенных из клинических образцов (отделяемое слизистых оболочек урогенитального тракта).



1. Подготовка к проведению амплификации.

Маркировка пробирок на крышке недопустима! Пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.


1.1. Приготовить необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного контрольных образцов.
Для исследования одного образца ДНК требуется 4 пробирки (по числу реакционных смесей).

1.2. Полностью разморозить компоненты из набора. Пробирки с реакционными смесями и разбавителем тщательно перемешать.

1.3. Приготовить и промаркировать 4 одноразовые полипропиленовые пробирки вместимостью 1,5

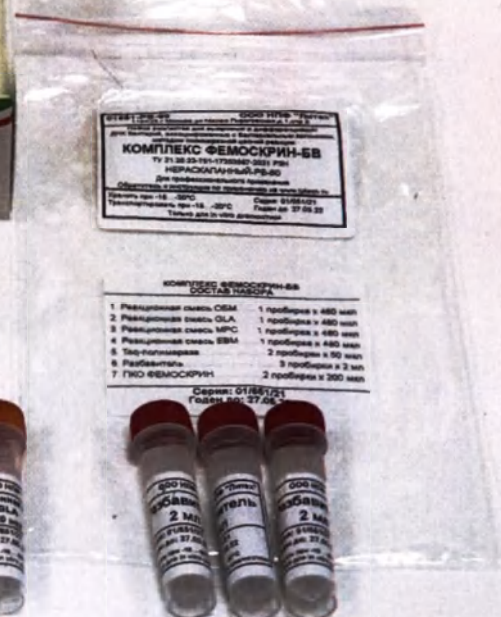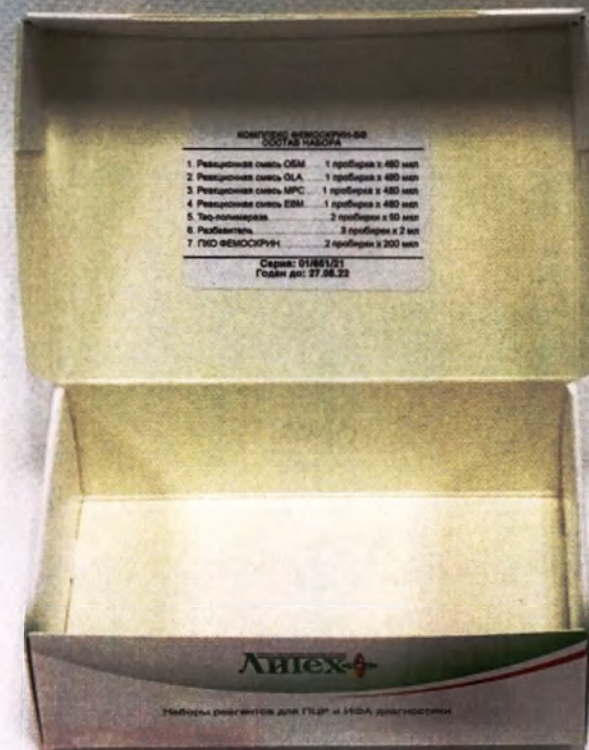



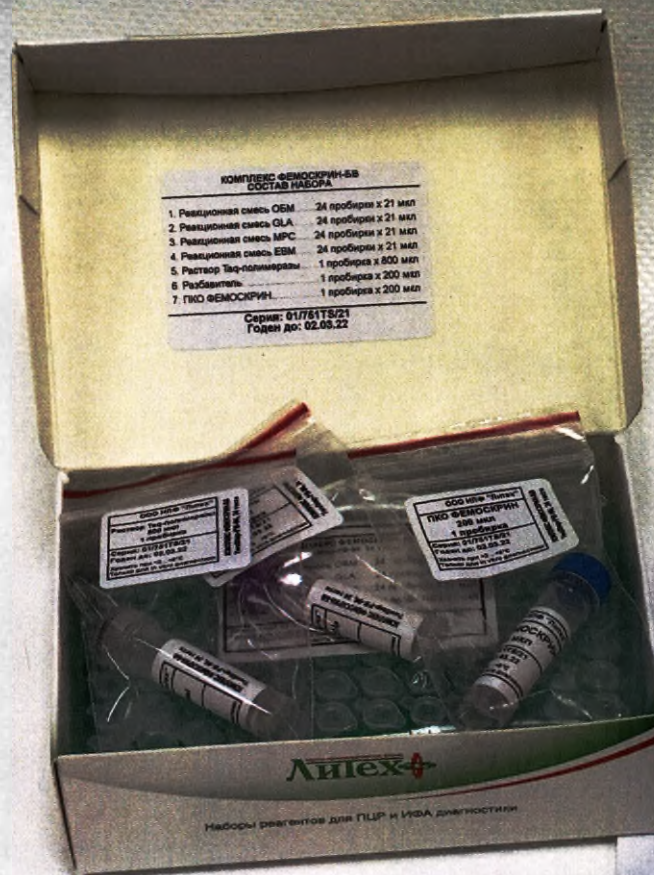

Вкладыш
к набору КОМПЛЕКС ФЕМОСКРИН-БВ
Номер серии набора 01/95-15/21



ПКО ФЕМОСКРИН представляет собой количественно-окислительно-восстановительную смесь ДНК-калibratorов (образцов ДНК-мишеней микроорганизмов, ассоциированных с бактериальным вагинозом, и человека).

Наименование калибратора	Концентрация (г/мл)	Допустимый диапазон Ct
--------------------------	---------------------	------------------------



ПАМЯТКА
по применению набора реагентов
для выявления и дифференциации ДНК бактерий,
ассоциированных с бактериальным вагинозом,
методом полимеразной цепной реакции
КОМПЛЕКС ФЕМОСКРИН-БВ
Комплектация TwoStep-PB-96.

Набор реагентов КОМПЛЕКС ФЕМОСКРИН-БВ комплектации TwoStep-PB-96 предназначен для одновременного выявления, дифференциации и количественного определения ДНК *Atopobium vaginae*, *Prevotella* spp., *Bacteroides Vaginalis*-Associated Bacteria 2, *Lactobacillus* spp., *Mobiluncus curtisi*, *Megacarburella* type 1, *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans*, *Eggerthella* spp. методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией в пробах мазков из влагалища (и/или мазков из уретры) и/или мазков из уретры (отделенных слизистых оболочек урогенитального тракта).

1. Подготовка к проведению амплификации.

Маркировка пробирок на крышке недопустима! Пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.1. Достать набор из холодильника и подготовить необходимое количество стрипов с реакционными смесями, включая стрипы для положительного и отрицательного контрольных образцов.

Для исследования одного образца ДНК требуется половина стрипа (четыре пробирки A-D или E-H). В каждой пробирке представлена реакционная смесь для определения соответствующих микроорганизмов.

Порядок расстановки реакционных смесей представлен на рисунке.





Фото 6. Набор реагентов **КОМПЛЕКС ФЕМОСКРИН-БВ**, вариант исполнения *TwoStep-PB-96*, 24 теста.
Состав набора.



Фото 7. Набор реагентов **КОМПЛЕКС ФЕМОСКРИН-БВ**, вариант исполнения *TwoStep-PB-96*, 48 тестов.
Потребительская упаковка.

Литех

Образец маркировки групповой упаковки

Набор реагентов для выявления и дифференциации ДНК бактерий,
ассоциированных с бактериальным вагинозом,
методом полимеразной цепной реакции
**КОМПЛЕКС ФЕМОСКРИН-БВ
НЕРАСКАПАННЫЙ-РВ-60**

Номер серии 01/651/21

Дата изготовления 29.05.21

Годен до 29.05.22

Число единиц потребительской упаковки _____

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____

Условия хранения:

Набор реагентов **КОМПЛЕКС ФЕМОСКРИН-БВ НЕРАСКАПАННЫЙ-РВ-60**
должен храниться при температуре -18...-20 °С в течение всего срока годности.
Срок годности набора – 12 месяцев.

Условия транспортировки:

Набор **КОМПЛЕКС ФЕМОСКРИН-БВ НЕРАСКАПАННЫЙ-РВ-60**
рекомендуется транспортировать при температуре хранения. Допустима
транспортировка при температуре +2...+8 °С в течение 5 дней (не более).



4G/Y/3,73/5/21
RUS/GOST 28319/ Cold Chain LLC

+7 (495) 740-88-11
www.cold-chain.com

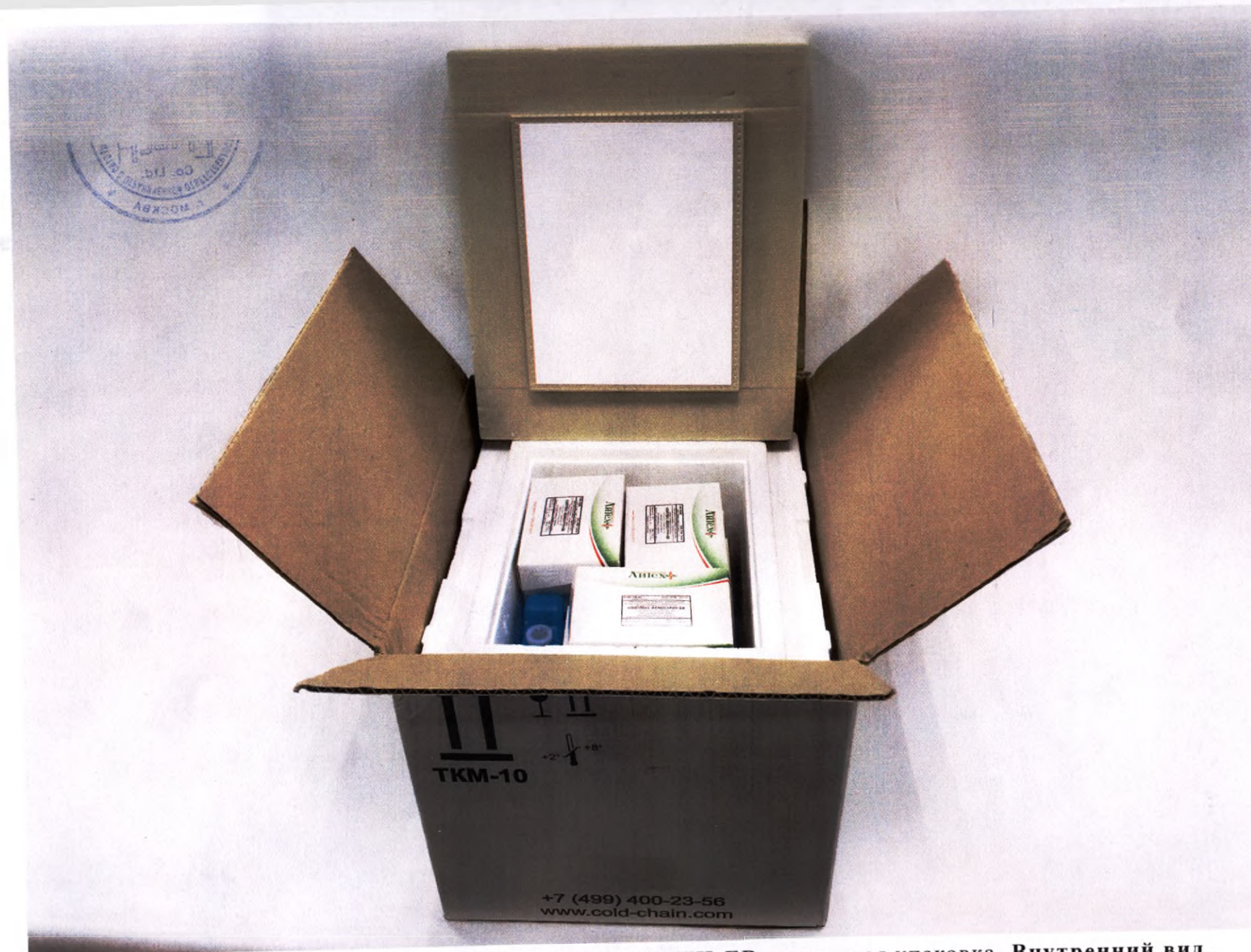


Фото 11. Набор реагентов **КОМПЛЕКС ФЕМОСКРИН-БВ**, групповая упаковка. Внутренний вид.

Копия на 11 листах верна.



Директор ООО НПФ «Литех»
Наумов А.Ю.