

Утверждаю



Директор
ООО «Фарм-Медик»
Е.В. Зайончковский
«13» октября 2023 г.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

**Средство перевязочное гемостатическое «ГЕМОФРИЗ»,
стерильное по ТУ 21.20.24 – 001 – 98448790 – 2022**



Фото Средство перевязочное гемостатическое «ГЕМОФРИЗ», стерильное по ТУ 21.20.24 – 001 – 9

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ

 **ГЕМОФРИЗ**

**МАССА
НЕТТО
50 г**

Назначение:

Остановка наружного
кровотечения различной
интенсивности, в том
числе при повреждении
крупных венозных и
артериальных сосудов.

В условиях стационара -
для остановки
кровотечения из
паренхиматозных
органов.



Номер партии:
Дата стерилизации:
Указаны на шве
упаковки

Не применять
по истечении
срока годности

4 20.03.23

Фото Индивидуальная упаковка (лицевая сторона)

ГЕМОФРИЗ. Порошкообразное перевязочное средство на основе производных цеолитов типов А и Х, обладающих сочетанной адсорбирующей и теплоотводной способностью.

Меры предосторожности:

- Изделие имеет особенности использования! Применять только после ознакомления с инструкцией.
- При контакте с жидкостью возможна экзотермическая реакция.
- При использовании необходимо беречь от попадания в глаза, в нос, в рот, на влажную кожу, при попадании промыть обильным количеством воды.
- При использовании необходимо беречь от попадания внутрь, при попадании немедленно выпить два или более стакана воды.
- Только для однократного применения!
- При нарушении герметичности в вакуумной упаковке для использования не годен (возможно увеличение объема пакета при увеличении температуры, при этом герметичность не нарушается, качество изделия не ухудшается).
- При контакте с кровью возможно нагревание.

Способ применения:

1. Перед применением «ГЕМОФРИЗ» рану очищают от инородных тел, сгустков крови (пиктограмма 1).
 2. Далее «ГЕМОФРИЗ» засыпают в полость раны (пиктограмма 2). Упаковку «ГЕМОФРИЗ» необходимо вскрывать непосредственно перед применением изделия, повторному использованию не подлежит. При нарушении герметичности упаковки для использования не годен из-за быстрого влагонасыщения.
 3. После заполнения полости раны «ГЕМОФРИЗ», поверх необходимо наложить ватно-марлевый тампон, и осуществить ручную компрессию в течение 5-7 мин (пиктограмма 3).
 4. При неэффективном гемостазе, необходимо повторно засыпать «ГЕМОФРИЗ» из другой упаковки и далее осуществлять механическую компрессию и наложить кровоостанавливающий жгут (в зависимости от места травмы) (пиктограмма 4).
 5. Для остановки кровотечения, тампон необходимо зафиксировать турами бинта, наложив давящую бинтовую повязку.
 6. При повреждении конечности, ее целесообразно иммобилизовать для снижения риска повторного кровотечения.
- * Изделие необходимо полностью удалить при первичной хирургической обработке, время нахождения в ране не более 24 часов. Изделие извлекается из раны механически и путем промывания водными растворами, используемыми для промывания ран.
- ** При глубоких ранах необходимо внесение изделия в область поврежденных сосудов, т.к. при поверхностном нанесении изделия кровотечение будет продолжаться.
- *** Применение изделия, при использовании в условиях стационара для остановки кровотечения из паренхиматозных органов, проводить согласно "Способу применения" п. 1-5



Хранить в сухом, защищенном от прямого попадания солнечного света месте, в условиях хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69, при температуре воздуха: от +40°C до -50°C, относительной влажности воздуха не более 98%.

Транспортировать в сухом, защищенном от прямого попадания солнечного света месте, в условиях хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69, температуры воздуха: от +40°C до -50°C, относительной влажности воздуха не более 98%.

Транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Эксплуатировать при УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69, предельное рабочее значение температуры воздуха: от +1°C до +40°C.

Противопоказания к применению: аллергическая реакция на компоненты

Утилизация: в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 как относящееся к медицинским отходам "класса Б". Неиспользованные изделия с истекшим сроком годности, а также неиспользованное из-за нарушения целостности упаковки утилизируют в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 как относящееся к медицинским отходам "класса А".




ТУ 21.20.24-001-98448790-2022
Срок годности 3 года с даты стерилизации.
ООО «Фарм-Медик», 150044, г. Ярославль, пр-кт Октября, зд. 78, литер 4, офис 7, литер 4.
Адрес производства: г. Ярославль, пр-т Октября, зд. 78, лит. 4, 1 этаж

Тел.: +7(4852)67-92-63 | info@farm-medico.com | farm-medico.com

Средство перевязочное гемостатическое «ГЕМОФРИЗ», стерильное по ТУ 21.20.24-001-98448790-2022

ГЕМОФРИЗ



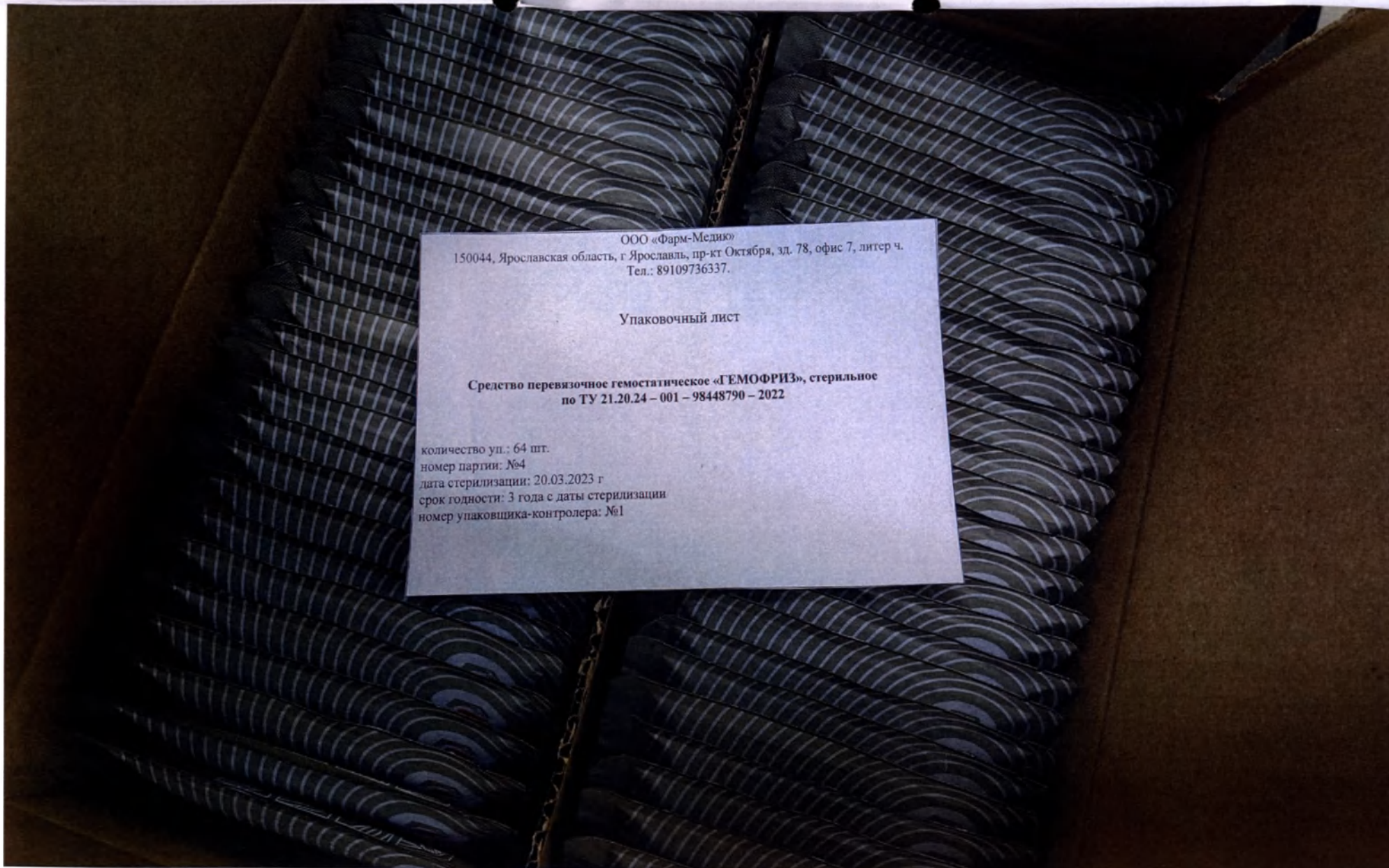

ООО «Фарм-Медико»
150044, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Октября, зд. 78, офис 7, литер ч.
Тел.: 89109736337.

Упаковочный лист

Средство перевязочное гемостатическое «ГЕМОФРИЗ», стерильное
по ТУ 21.20.24 – 001 – 98448790 – 2022

количество уп.: 64 шт.
номер партии: №4
дата стерилизации: 20.03.2023 г.
срок годности: 3 года с даты стерилизации
номер упаковщика-контролера: №1

Фото

Упаковочный лист

ООО «Фарм-Медик»

150044, Ярославская область, г Ярославль, пр-кт Октября, зд. 78, офис 7, литер 4.
Тел.: +7(4852)67-92-63

Средство перевязочное гемостатическое «ГЕМОФРИЗ», стерильное
по ТУ 21.20.24 – 001 – 98448790 – 2022

масса нетто, 1 пакет: 50 г
количество уп.: 64 шт.
дата стерилизации: 20.03.2023 г.
масса брутто: 3,520 г
номер партии: №4
срок годности: 3 года с даты стерилизации

Хранить в сухом, защищенном от прямого попадания солнечного света месте, в условиях хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69, при температуре воздуха: от +40 °С до - 50 °С, относительной влажности воздуха не более 98 %.

Транспортировать в сухом, защищенном от прямого попадания солнечного света месте, в условиях хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69, температуры воздуха: от +40 °С до - 50 °С, относительной влажности воздуха не более 98 %. Транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

способ утилизации:
в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.684-21 как относящиеся к медицинским отходам "класса Б". Неиспользованные изделия с истекшим сроком годности, а также неиспользованное из-за нарушения целостности упаковки утилизируют в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.684-21 как относящиеся к медицинским отходам "класса А".

не применять по истечении срока годности



ШТРИХ-КОД

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 6



(шесть) листах

Директор ООО "Фарм-Медик"

Зайончковский Е.В.

Утверждаю



Директор
ООО «Фарм-Медик»
Е.В. Зайончковский
«13» октября 2023 г.

Этикетка медицинского изделия

**Средство перевязочное гемостатическое «ГЕМОФРИЗ»,
стерильное по ТУ 21.20.24 – 001 – 98448790 – 2022**

Маркировка индивидуальной упаковки

Лицевая сторона

Средство перевязочное гемостатическое «ГЕМОФРИЗ»

масса нетто: 50 г

Назначение:

Остановка наружного кровотечения различной интенсивности, в том числе при повреждении крупных венозных и артериальных сосудов.

В условиях стационара - для остановки кровотечения из паренхиматозных органов.

Стерильно. Нетоксично.

Не применять по истечении срока годности

Номер партии:

Дата стерилизации:

Указаны на шве упаковки.

Маркировка индивидуальной упаковки

Оборотная сторона

ГЕМОФРИЗ. Порошкообразное перевязочное средство на основе производных цеолитов типов А и Х, обладающих сочетанной адсорбирующей и теплотворной способностью.

Меры предосторожности:

- Изделие имеет особенности использования! Применять только после ознакомления с инструкцией.
- При контакте с жидкостью возможна экзотермическая реакция.
- При использовании необходимо беречь от попадания в глаза, в нос, в рот, на влажную кожу, при попадании промыть обильным количеством воды.
- При использовании необходимо беречь от попадания внутрь, при попадании немедленно выпить два или более стакана воды;
- Только для однократного применения;
- При нарушении герметичности вакуумной упаковки для использования не годен (возможно увеличение объема пакета при увеличении температуры, при этом герметичность не нарушается, качество изделия не ухудшается)
- При контакте с кровью возможно нагревание.


Способ применения:

1. Перед применением «ГЕМОФРИЗ», рану очищают от инородных тел, сгустков крови (пиктограмма 1).
2. Далее «ГЕМОФРИЗ» засыпают в полость раны (пиктограмма 2). Упаковку «ГЕМОФРИЗ» необходимо вскрывать непосредственно перед применением изделия, повторному использованию не подлежит. При нарушении герметичности упаковки для использования не годен из-за быстрого влагонасыщения.
3. После заполнения полости раны «ГЕМОФРИЗ», поверх необходимо наложить ватно-марлевый тампон, и осуществить ручную компрессию в течении 5-7 мин (пиктограмма 3).
4. При неэффективном гемостазе, необходимо повторно засыпать «ГЕМОФРИЗ» из другой упаковки и далее осуществлять механическую компрессию и наложить кровоостанавливающий жгут (в зависимости от места травмы) (пиктограмма 4).
5. Для остановки кровотечения, тампон необходимо зафиксировать турами бинта, наложив давящую бинтовую повязку.
6. При повреждении конечности, ее целесообразно иммобилизовать, для снижения риска повторного кровотечения.

* Изделие необходимо полностью удалить при первичной хирургической обработке, время нахождения в ране не более 24 часов. Изделие извлекается из раны механически и путем промывания водными растворами, используемыми для промывания ран.

** При глубоких ранах необходимо внесение изделия в область поврежденных сосудов, т.к. при поверхностном нанесении изделия кровотечение будет продолжаться.

*** Применение изделия, при использовании в условиях стационара для остановки кровотечения из паренхиматозных органов, проводить согласно "Способу применения" п. 1-5

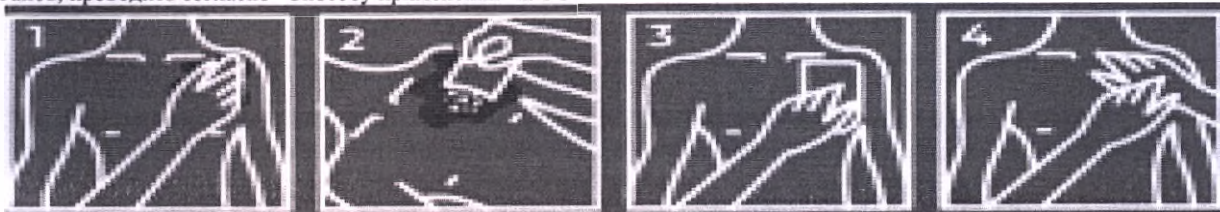

Хранить в сухом, защищенном от прямого попадания солнечного света месте, в условиях хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69, при температуре воздуха: от +40°C до - 50 °С, относительной влажности воздуха не более 98 %.

Транспортировать в сухом, защищенном от прямого попадания солнечного света месте, в условиях хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69, температуры воздуха: от +40°C до - 50 °С, относительной влажности воздуха не более 98 %. Транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Эксплуатировать при УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69, предельное рабочее значение температуры воздуха: от +1°C до + 40 °С.

Противопоказания к применению: аллергическая реакция на компоненты

Утилизация: в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 как относящиеся к медицинским отходам "класса Б". Неиспользованные изделия с истекшим сроком годности, а также неиспользованное из-за нарушения целостности упаковки утилизируют в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 как относящиеся к медицинским отходам "класса А".

ТУ 21.20.24-001-98448790-2022 Срок годности 3 года с даты стерилизации.

ООО «Фарм-Медик», 150044, г. Ярославль, пр-кт Октября, зд. 78, литер 4, офис 7, литер ч.

Адрес производства: г. Ярославль, пр-т Октября, зд. 78, лит. Ч, 1 этаж

Тел.: +7(4852)67-92-63 | info@farm-medic.com | farm-medic.com

Средство перевязочное гемостатическое «ГЕМОФРИЗ», стерильное по ТУ 21.20.24-001-98448790-2022

ГЕМОФРИЗ

Штрих-код



Маркировка транспортной упаковки

ООО «Фарм-Медик»

150044, Ярославская область, г Ярославль, пр-кт Октября, зд. 78, офис 7, литер ч.

Тел.: +7(4852)67-92-63

Средство перевязочное гемостатическое «ГЕМОФРИЗ», стерильное по ТУ 21.20.24 – 001 – 98448790 – 2022

масса нетто, 1 пакет: 50 г

масса брутто: 3,520 г

количество уп.: 64 шт.

номер партии: _____

дата стерилизации: _____

срок годности: 3 года с даты стерилизации


Хранить в сухом, защищенном от прямого попадания солнечного света месте, в условиях хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69, при температуре воздуха: от +40°C до - 50 °C, относительной влажности воздуха не более 98 %.

Транспортировать в сухом, защищенном от прямого попадания солнечного света месте, в условиях хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69, температуры воздуха: от +40°C до - 50 °C, относительной влажности воздуха не более 98 %. Транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

способ утилизации:

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 как относящееся к медицинским отходам "класса Б". Неиспользованные изделия с истекшим сроком годности, а также неиспользованное из-за нарушения целостности упаковки утилизируют в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 как относящееся к медицинским отходам "класса А".

не применять по истечении срока годности

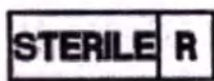

штрих-код

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 4



четырёх листах

Директор ООО „Фарм-Медик“

З.Г. Шимовский Е.В.