


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Здравмедтех-Н»

А.И. Клевасов

«20» апреля 2023 г.

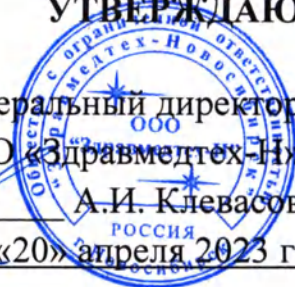

**Халат медицинский одноразовый нестерильный в вариантах исполнения по
ТУ 14.12.30-017-70516780-2022**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Версия 4

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Общая информация

«Халат медицинский одноразовый нестерильный в вариантах исполнения по ТУ 14.12.30-017-70516780-2022» (далее по тексту – Изделие) (см. Приложение 1).

Производитель Изделия:

Общество с ограниченной ответственностью «Здравмедтех-Новосибирск» (ООО «Здравмедтех-Н»).

Юридический адрес: Россия, 630091, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Советская 64/1, оф. 607.

тел: +7 (383) 209-22-30, e-mail: Info@zmt-nsk.ru

Место производства: Россия, 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская, д. 11/90.

Класс Изделия в зависимости от степени потенциального риска применения по ГОСТ 31508 – 1.

Изделие поставляется нестерильным.

Изделие однократного применения.

Изделие кратковременного контакта с неповрежденной кожей (по ГОСТ 10993-1).

1.2 Назначение изделия

Изделие предназначено для применения при выполнении медицинских процедур с целью защиты как пациента, так и медицинского персонала от инфекционных агентов, переноса микроорганизмов, физиологических жидкостей и твердых частиц в медицинских организациях.

Область применения: первичная и специализированная медицинская помощь, как амбулаторная, так и стационарная.

Потенциальные потребители: медицинский персонал медицинских организаций.

Показания к применению: проведение медицинских процедур.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов изготовления Изделия.

Побочные действия: возможна аллергическая реакция при непереносимости материалов изготовления Изделия.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ

В случае обнаружения дефектов, которые могут повлиять на функциональные качества Изделия – прекратить использование.

Возможна аллергическая реакция при непереносимости материала изготовления. Не применять Изделие в случае индивидуальной непереносимости материалов изготовления.

Не использовать Изделие после окончания срока годности.

3. ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Варианты исполнения Изделия представлены в таблице 1.

Таблица 1. Варианты исполнения Изделия

№	Варианты исполнения Изделия	№ рисунка Приложения 3
1.	Халат процедурный (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, рукава на резинке или на манжете, горловина на липе)	1
2.	Халат процедурный (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, рукава на резинке или на манжете, застежка на кнопках или на липе)	2
3.	Халат медицинский (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом)	3
4.	Халат медицинский (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом)	4
5.	Халат медицинский (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете)	5
6.	Халат медицинский «Евростандарт» (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, с застежкой сзади, запах на спине, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, 4 пояса)	6
7.	Халат медицинский «Евростандарт» (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, с застежкой сзади, запах на спине, горловина на завязках или на липе, рукав с отверстием для пальца, 4 пояса)	7
8.	Халат стандартного покроя (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, с воротником или без воротника, рукава на резинке или на манжете, или короткий рукав, застежка на кнопках или на пуговицах или на липах или на молнии, с карманами или без карманов)	8
9.	Халат специальный противозидемический (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, с воротником-стойкой и завязками, рукава на резинке или на манжете, спинка на запахе, на поясе)	9
10.	Халат-кимоно (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1400 мм с шагом 5 мм, на запахе спереди, на поясе)	10

Прочность на растяжение в сухом и влажном состоянии не менее 20 Н.

Водоупорность не менее 10 см H₂O.

Воздухопроницаемость не более 4000 дм³/м²/с.

Прочность швов не менее 10 Н.

Изделие в упаковке устойчиво к механическим воздействиям при транспортировании в режимах: частота вибрационных нагрузок 10-55 Гц, амплитуда перемещения 0,35 мм.

Изделие устойчиво к климатическим воздействиям при эксплуатации в температурном диапазоне от плюс 10°C до плюс 35°C и относительной влажности не более 80%.

4. МАТЕРИАЛЫ

Изделие производится из нетоксичных материалов, указанных в таблице 2.

Таблица 2. Материалы, используемые при производстве

№ п/п	Наименование	Состав (марка)	Производитель	Поверхностная плотность, г/м ²	Перечень применения
1.	Полипропилен (PP)	Полотно нетканое «Полиспан Меди» для изделий медицинского назначения и разового употребления по СТО 96891647-002-2009 Сырьевой состав: полипропилен 100 % Краситель: концентрат красителя голубой Remafin-blue PP52076994-ZT («Avient») Цвет: голубой	АО «Полиматиз»	15±5, 20±5, 25±5, 30±5, 35±5, 40±5, 45±5, 50±5, 55±5, 60±5	1. Халат процедурный (рукава на резинке или на манжете, горловина на липе) 2. Халат процедурный (рукава на резинке или на манжете, застежка на кнопках или на липе) 3. Халат медицинский (горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом) 4. Халат медицинский (рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом) 5. Халат медицинский (рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете) 6. Халат медицинский «Евростандарт» (с застежкой сзади, запах на спине, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, 4 пояса) 7. Халат медицинский «Евростандарт» (с застежкой сзади, запах на спине, горловина на завязках или на липе, рукав с отверстием для пальца, 4 пояса) 8. Халат стандартного покроя (с воротником или без воротника, рукава на резинке или на манжете, или короткий рукав, застежка на кнопках или на пуговицах или на липах или на молнии, с карманами или без карманов) 9. Халат специальный противозидемический (с воротником-стойкой и завязками, рукава на резинке или на манжете, спинка на запахе, на поясе) 10. Халат-кимоно (на запахе спереди, на поясе)
2.		Полотно нетканое термоскрепленное Новоспан. Марки: Новоспан 160, Новоспан 220, Новоспан-Мед Сырьевой состав: полипропилен 100 % Краситель: - Цвет: белый	ООО «Новоспан»	15±5, 20±5, 25±5, 30±5, 35±5, 40±5, 45±5, 50±5, 55±5, 60±5	
3.	Полипропилен, полиэтилен (PP/PE)	Полотно нетканое «Полиспан Меди» по СТО 96891647-002-2009 Сырьевой состав: - полипропилен (72%), - полиэтилен (28%) Краситель: концентрат красителя голубой Remafin-blue PP52076994-ZT («Avient») Цвет: голубой	АО «Полиматиз»	30±5, 35±5, 40±5, 45±5, 50±5, 55±5, 60±5	1. Халат процедурный (рукава на резинке или на манжете, горловина на липе) 2. Халат процедурный (рукава на резинке или на манжете, застежка на кнопках или на липе) 3. Халат медицинский (горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом) 4. Халат медицинский (рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом) 5. Халат медицинский (рукав реглан, горловина на завязках или

				на липе, рукава на резинке или на манжете) 6. Халат медицинский «Евростандарт» (с застежкой сзади, запах на спине, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, 4 пояса) 7. Халат медицинский «Евростандарт» (с застежкой сзади, запах на спине, горловина на завязках или на липе, рукав с отверстием для пальца, 4 пояса) 8. Халат стандартного покроя (с воротником или без воротника, рукава на резинке или на манжете, или короткий рукав, застежка на кнопках или на пуговицах или на липах или на молнии, с карманами или без карманов) 9. Халат специальный противозидемический (с воротником-стойкой и завязками, рукава на резинке или на манжете, спинка на запахе, на поясе) 10. Халат-кимоно (на запахе спереди, на поясе)
4.	Манжеты	Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, витые, вязанные, метражные и штучные по ГОСТ 18827 Состав: Хлопок – 70% Полизфир – 30% Резинка вязаная; лента полиэфирная; лента отделочная; шнур текстильный; трубка трикотажная; резинка ткацкая по ГОСТ 18827 Краситель: - Цвет: белый	ООО «КЕС Тек» Россия	1. Халат процедурный (рука-ва на манжете, горловина на липе) (манжеты) 2. Халат процедурный (рука-ва на манжете, застежка на кнопках или на липе) (манжеты) 3. Халат медицинский (гор-ловина на завязках или на липе, рукава на манжете, с поясом) (манжеты) 4. Халат медицинский (рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на манжете, с поясом) (манжеты) 5. Халат медицинский (рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на манжете) (манжеты) 6. Халат медицинский «Ев-ростандарт» (с застежкой сзади, запах на спине, горловина на завязках или на липе, рукава на манжете, 4 пояса) (манжеты) 7. Халат стандартного покроя (с воротником или без воротника, рукава на манжете, застежка на кнопках или на пуговицах или на липах или на молнии, с карманами или без карманов) (манжеты) 8. Халат специальный противозидемический (с воротником-стойкой и завязками, рукава на резинке или на манжете, спинка на запахе, на поясе) (манжеты)

5.	Резинка	Тесьма вязаная по ОСТ 17-10-883-93	ООО «Фи- текс»	1. Халат процедурный (рукава на резинке, горловина на липе) (резинка) 2. Халат процедурный (рукава на резинке, застежка на кнопках или на липе) (резинка) 3. Халат медицинский (горловина на завязках или на липе, рукава на резинке, с поясом) (резинка) 4. Халат медицинский (рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке, с поясом) (резинка) 5. Халат медицинский (рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке) (резинка) 6. Халат медицинский «Евростандарт» (с застежкой сзади, запах на спине, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке, 4 пояса) (резинка) 7. Халат стандартного покроя (с воротником или без воротника, рукава на резинке, застежка на кнопках или на пуговицах или на липах или на молнии, с карманами или без карманов) (резинка) 8. Халат специальный противоэпидемический (с воротником-стойкой и завязками, рукава на резинке, спинка на запахе, на поясе) (резинка)
6.	Нитки	Нити швейные из синтетических волокон (полиэфир) по ГОСТ 6309 торговой марки Veritas	NINGBO MH INDUSTRY CO. LTD, Китай	1. Халат процедурный (рукава на резинке или на манжете, горловина на липе) 2. Халат процедурный (рукава на резинке или на манжете, застежка на кнопках или на липе) 3. Халат медицинский (горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом) 4. Халат медицинский (рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом) 5. Халат медицинский (рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете) 6. Халат медицинский «Евростандарт» (с застежкой сзади, запах на спине, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, 4 пояса) 7. Халат медицинский «Евростандарт» (с застежкой сзади, запах на спине, горловина на завязках или на липе, рукав с отверстием для пальца, 4 пояса)
7.		100% полиэфир	ООО «ЕВРОНИТЬ»	

					8. Халат стандартного покроя (с воротником или без воротника, рукава на резинке или на манжете, или короткий рукав, застежка на кнопках или на пуговицах или на липах или на молнии, с карманами или без карманов) 9. Халат специальный противозидемический (с воротником-стойкой и завязками, рукава на резинке или на манжете, спинка на запахе, на поясе) 10. Халат-кимоно (на запахе спереди, на поясе)
8.	Молния пластмассовая		ООО «ИНТЕРА»		1. Халат стандартного покроя (с воротником или без воротника, рукава на резинке или на манжете, или короткий рукав, застежка на молнии, с карманами или без карманов) (молния)
9.	Липа	Изделия галантерейные для швейного производства из синтетических нитей с маркировкой «Veritas». Застежка текстильная «лента контакт» по ГОСТ 30019.1-93	NINGBO MH INDUSTRY CO. LTD, Китай		1. Халат процедурный (рукава на резинке или на манжете, горловина на липе) (липа) 2. Халат процедурный (рукава на резинке или на манжете, застежка на липе) (липа) 3. Халат медицинский (горловина на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом) (липа) 4. Халат медицинский (рукав реглан, горловина на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом) (липа) 5. Халат медицинский (рукав реглан, горловина на липе, рукава на резинке или на манжете) (липа) 6. Халат медицинский «Евростандарт» (с застежкой сзади, запах на спине, горловина на липе, рукава на резинке или на манжете, 4 пояса) (липа) 7. Халат медицинский «Евростандарт» (с застежкой сзади, запах на спине, горловина на липе, рукав с отверстием для пальца, 4 пояса) (липа) 8. Халат стандартного покроя (с воротником или без воротника, рукава на резинке или на манжете, или короткий рукав, застежка на липах, с карманами или без карманов) (липа)

Примечание:

- допускается изменение цвета применяемых материалов при подтверждении соответствия п.2 ТУ (требования безопасности).
- При сложении халата медицинского «Евростандарт» может применяться фиксатор из картона для фиксации поясов до применения Изделия.

Красители при изготовлении Изделия не применяются.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность приведена в таблице 3.

Таблица 3. Комплектность

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт
1.	Халат процедурный (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, рукава на резинке или на манжете, горловина на липе)	от 1 до 50
2.	Халат процедурный (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, рукава на резинке или на манжете, застежка на кнопках или на липе)	от 1 до 50
3.	Халат медицинский (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом)	от 1 до 50
4.	Халат медицинский (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом)	от 1 до 50
5.	Халат медицинский (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете)	от 1 до 50
6.	Халат медицинский «Евростандарт» (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, с застежкой сзади, запах на спине, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, 4 пояса)	от 1 до 50
7.	Халат медицинский «Евростандарт» (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, с застежкой сзади, запах на спине, горловина на завязках или на липе, рукав с отверстием для пальца, 4 пояса)	от 1 до 50
8.	Халат стандартного покроя (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, с воротником или без воротника, рукава на резинке или на манжете, или короткий рукав, застежка на кнопках или на пуговицах или на липах или на молнии, с карманами или без карманов)	от 1 до 50
9.	Халат специальный противозидемический (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, с воротником-стойкой и завязками, рукава на резинке или на манжете, спинка на запахе, на поясе)	от 1 до 50
10.	Халат-кимоно (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1400 мм с шагом 5 мм, на запахе спереди, на поясе)	от 1 до 50

В комплект поставки входит инструкция по применению.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Перед использованием необходимо осмотреть упаковку Изделия на отсутствие механических повреждений и убедиться в ее целостности. Запрещается использовать Изделие, если нарушена целостность его упаковки.

ВНИМАНИЕ! Изделие предназначено для однократного применения. Повторное использование запрещается!

Не использовать Изделие после окончания срока годности.

7. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ)

7.1 Общая информация по применению Изделия

Изделие поставляется в нестерильном виде, готовое к эксплуатации.

После транспортирования в условиях отрицательных температур Изделие должно быть выдержано в транспортной таре в нормальных климатических условиях не менее 2 часов.

7.2 Правила применения Изделия

До начала работы с изделием необходимо проверить целостность упаковки.

Ознакомиться с этикеткой.

Проверить вариант исполнения Изделия.

Проверить срок годности Изделия.

7.3. Порядок работы с Изделием

- вскрыть потребительскую упаковку;
- достать Изделие из упаковки;
- развернуть Изделие;
- надеть;
- застегнуть;
- зафиксировать завязки/липу на горловине (при наличии);
- завязать пояса (при наличии);
- при наличии фиксатора поясов «Барьер»: завязать внутренние завязки; достать пояс из правой части Барьера; обернуть запах слева направо; достать пояс из левой части Барьера; завязать пояса;
- после завершения процедур снять Изделие, выворачивая его наизнанку;
- после использования утилизировать Изделие в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Транспортирование

Изделие в упаковке и в транспортной таре следует транспортировать в крытых транспортных средствах транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Условия транспортирования Изделия в упаковке и транспортной таре – при температуре от минус 50°C до плюс 50°C и относительной влажности не более 80%.

При транспортировании транспортные тары с Изделиями должны быть закреплены таким образом, чтобы исключить возможность их самопроизвольного перемещения и соударения друг с другом и с бортами транспортного средства.

При погрузке, выгрузке и транспортировании Изделия должны быть приняты меры, предохраняющие его и транспортную тару от загрязнения, повреждения и попадания влаги.

8.2 Хранение

Хранение Изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в потребительской упаковке либо потребительской упаковке и транспортной таре – при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C и относительной влажности не более 80%. Изделия должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные Изделия подлежат утилизации согласно СанПин 2.1.3684 (класс Б). Неиспользованные Изделия, с повреждённой упаковкой, со следами повреждений или с истекшим сроком годности подлежат утилизации согласно СанПин 2.1.3684 (класс А).

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям ТУ 14.12.30-017-70516780-2022 при соблюдении указаний по транспортированию, хранению и применению.

Гарантийный срок хранения Изделия в упаковке предприятия-изготовителя – 5 лет с даты изготовления.

11. РЕКЛАМАЦИИ

Запросы любого рода и рекламации следует направлять в ООО «Здравмедтех-Н» по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская 64/1, оф. 607, тел.: +7 (383) 209-22-30, e-mail: Info@zmt-nnsk.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

«Халат медицинский одноразовый нестерильный в вариантах исполнения по ТУ 14.12.30-017-70516780-2022»

1. Халат процедурный (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, рукава на резинке или на манжете, горловина на липе) - от 1 до 50 шт;
2. Халат процедурный (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, рукава на резинке или манжете, застежка на кнопках или на липе) - от 1 до 50 шт;
3. Халат медицинский (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом) - от 1 до 50 шт;
4. Халат медицинский (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом) - от 1 до 50 шт;
5. Халат медицинский (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете) - от 1 до 50 шт;
6. Халат медицинский «Евростандарт» (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, с застежкой сзади, запах на спине, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, 4 пояса) - от 1 до 50 шт;
7. Халат медицинский «Евростандарт» (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, с застежкой сзади, запах на спине, горловина на завязках или на липе, рукав с отверстием для пальца, 4 пояса) - от 1 до 50 шт;
8. Халат стандартного покроя (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, с воротником или без воротника, рукава на резинке или на манжете, или короткий рукав, застежка на кнопках или на пуговицах или на липах или на молнии, с карманами или без карманов) - от 1 до 50 шт;
9. Халат специальный противоэпидемический (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, с воротником-стойкой и завязками, рукава на резинке или на манжете, спинка на запахе, на поясе) - от 1 до 50 шт;
10. Халат-кимоно (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1400 мм с шагом 5 мм, на запахе спереди, на поясе) - от 1 до 50 шт.

Документация:

Инструкция по применению – 1 шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Обозначение	Наименование документа
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска
ГОСТ ISO 10993-10-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
ГОСТ 31214-2016	Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

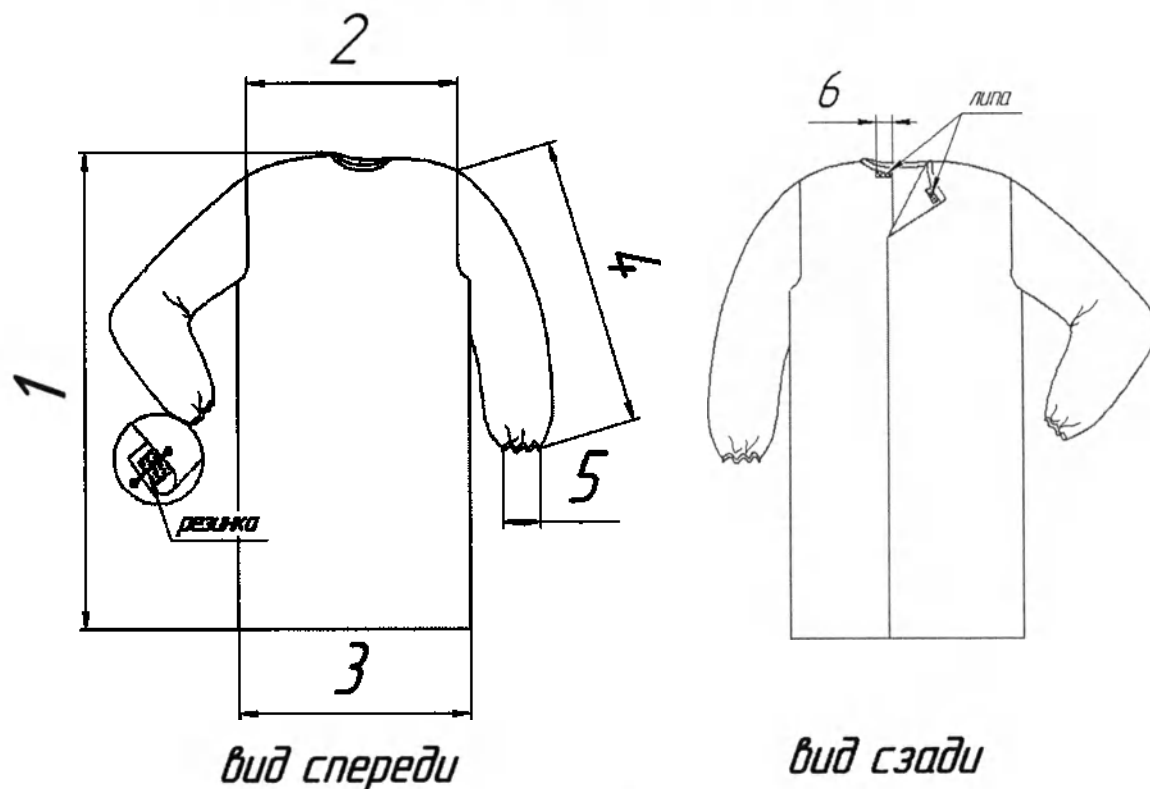


Рис. 1 – Халат процедурный (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, рукава на резинке или на манжете, горловина на липе)

Таблица В1 – Габаритные размеры халата процедурного (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, рукава на резинке или на манжете, горловина на липе)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42, 42-44	44-46, 46-48	48-50, 50-52, 52-54	54-56, 56-58, 58-60	60-62, 62-64, 64-66	66-68, 68-70, 70-74	74-76	
1	Длина изделия, мм	от 1050 до 1750 мм с шагом 5 мм							± 20
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы (ПО), мм	700	750	805	870	930	990	1050	± 20
3	Ширина изделия внизу (ПО), мм	700	750	805	870	930	990	1050	± 20
4	Длина рукава, мм 4.1 на резинке 4.2 на манжете	4.1: 578 4.2: 585	4.1: 584 4.2: 591	4.1: 590 4.2: 597	4.1: 596 4.2: 603	4.1: 602 4.2: 609	4.1: 608 4.2: 615	4.1: 614 4.2: 621	± 20
5	Ширина рукава внизу (ПО), мм 5.1 на резинке 5.2 на манжете	5.1: 90 5.2: 60	5.1: 95 5.2: 60	5.1: 100 5.2: 60	5.1: 105 5.2: 60	5.1: 110 5.2: 60	5.1: 115 5.2: 60	5.1: 120 5.2: 60	± 20
6	Липа (длина x ширина), мм	50x20	50x20	50x20	50x20	50x20	50x20	50x20	± 20

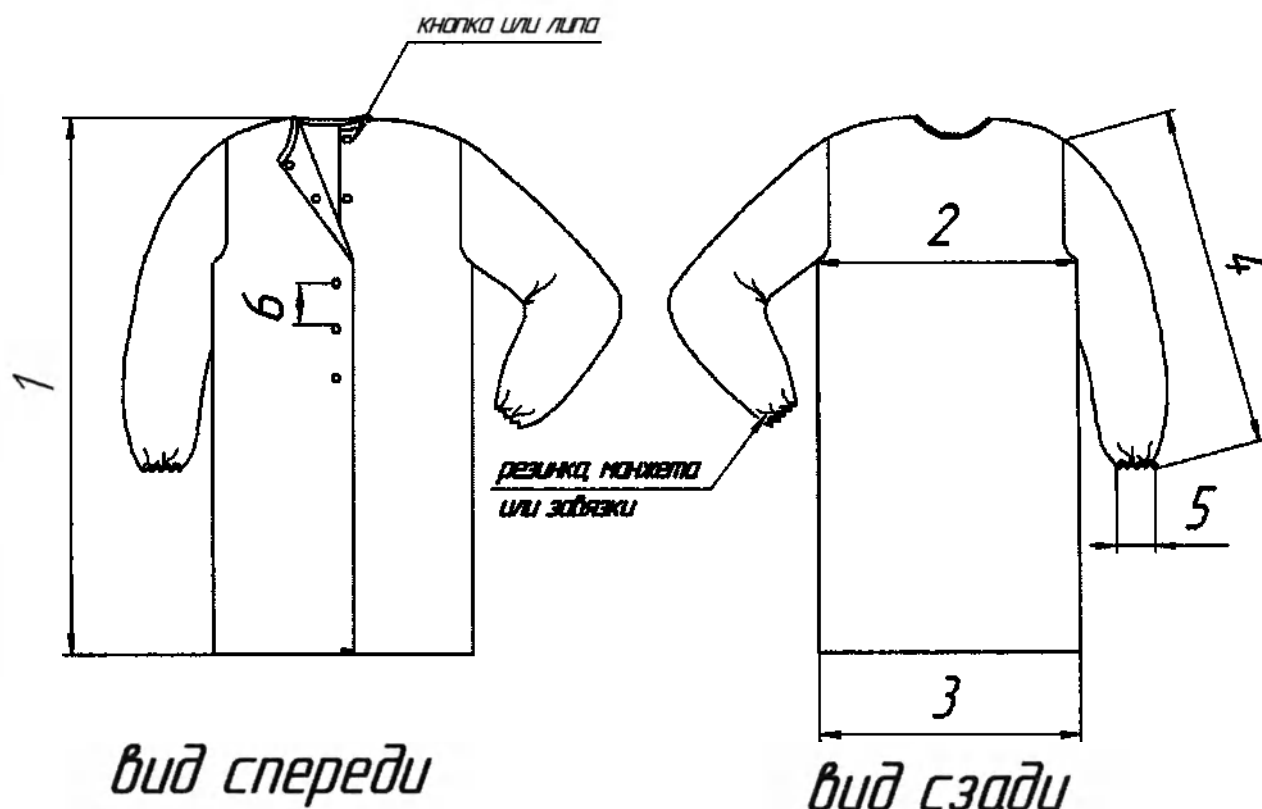


Рис. 2 – Халат процедурный (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, рукава на резинке или манжете, застежка на кнопках или на липе)

Таблица В2 – Габаритные размеры халата процедурного (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, рукава на резинке или манжете, застежка на кнопках или на липе)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42, 42-44	44-46, 46-48	48-50, 50-52, 52-54	54-56, 56-58, 58-60	60-62, 62-64, 64-66	66-68, 68-70, 70-74	74-76	
1	Длина изделия, мм	от 1050 до 1750 мм с шагом 5 мм							± 20
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы (ПО), мм	550	600	650	710	770	830	880	± 20
3	Ширина изделия внизу (ПО), мм	550	600	650	710	770	830	880	± 20
4	Длина рукава, мм 4.1 на резинке 4.2 на манжете	4.1:650 4.2:657	4.1:655 4.2:662	4.1:660 4.2:667	4.1:665 4.2:672	4.1:670 4.2:677	4.1:675 4.2:682	4.1:680 4.2:687	± 20
5	Ширина рукава внизу (ПО), мм 5.1 на резинке 5.2 на манжете	5.1: 90 5.2: 60	5.1: 95 5.2: 60	5.1:100 5.2: 60	5.1:105 5.2: 60	5.1:110 5.2: 60	5.1:115 5.2: 60	5.1:120 5.2: 60	± 20
6	Расстояние между кнопками/ липой, мм	170	170	170	170	170	170	170	± 20
7	Липа (длина x ширина), мм	30x20	30x20	30x20	30x20	30x20	30x20	30x20	± 20

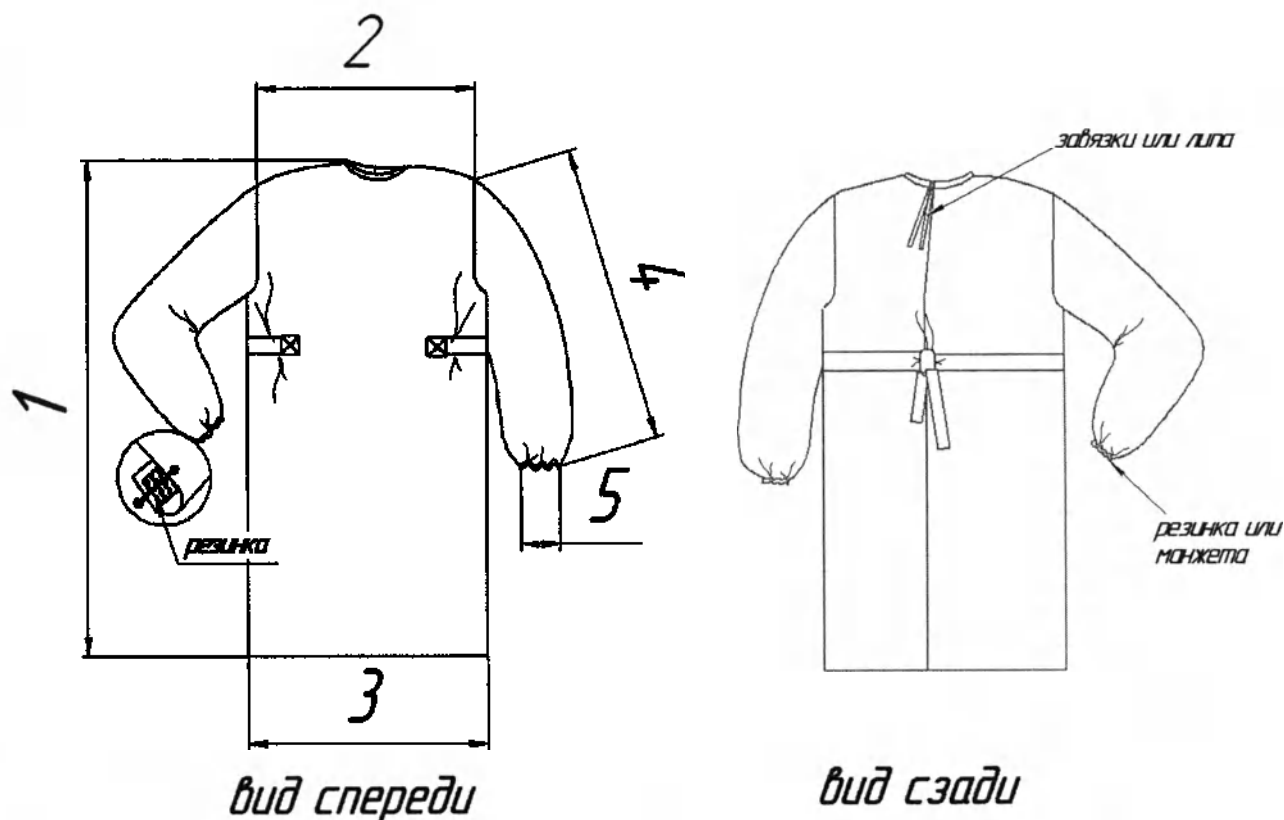


Рис. 3 – Халат медицинский (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом)

Таблица В3 – Габаритные размеры халата медицинского (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42, 42-44	44-46, 46-48	48-50, 50-52, 52-54	54-56, 56-58, 58-60	60-62, 62-64, 64-66	66-68, 68-70, 70-74	74-76	
1	Длина изделия, мм	от 1050 до 1750 мм с шагом 5 мм							± 20
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы (ПО), мм	650	685	745	805	865	925	990	± 20
3	Ширина изделия внизу (ПО), мм	650	685	745	805	865	925	990	± 20
4	Длина рукава, мм 4.1 на резинке 4.2 на манжете	4.1: 578 4.2: 585	4.1: 584 4.2: 591	4.1: 590 4.2: 597	4.1: 596 4.2: 603	4.1: 602 4.2: 609	4.1: 608 4.2: 615	4.1: 614 4.2: 621	± 20
5	Ширина рукава внизу (ПО), мм 5.1 на резинке 5.2 на манжете	5.1: 90 5.2: 60	5.1: 95 5.2: 60	5.1: 100 5.2: 60	5.1: 105 5.2: 60	5.1: 110 5.2: 60	5.1: 115 5.2: 60	5.1: 120 5.2: 60	± 20
6	Пояс (длина x ширина), мм	830x40	830x40	830x40	830x40	830x40	830x40	830x40	± 20
7	Липа (длина x ширина), мм	50x20	50x20	50x20	50x20	50x20	50x20	50x20	± 20
8	Завязки (длина x ширина), мм	200x10	200x10	200x10	200x10	200x10	200x10	200x10	± 20


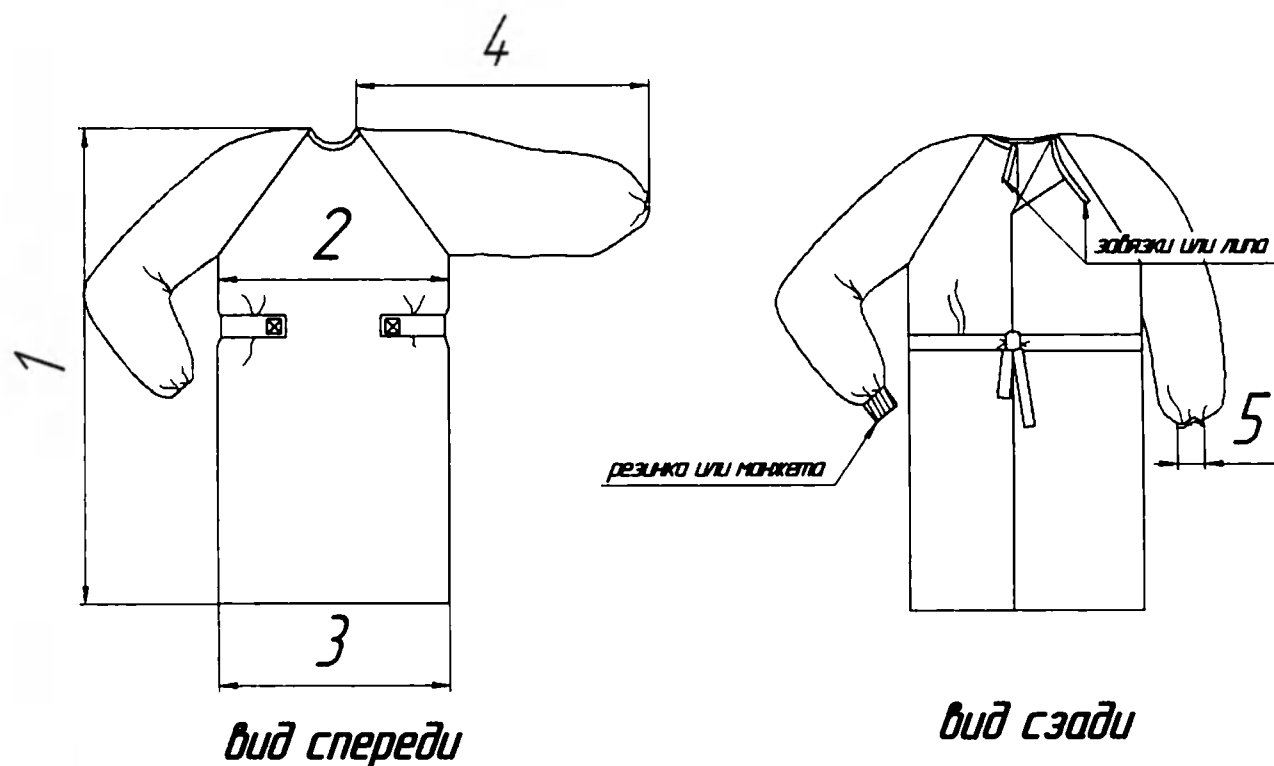



Рис. 4 – Халат медицинский (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом)

Таблица В4 – Габаритные размеры халата медицинского (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, с поясом)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42, 42-44	44-46, 46-48	48-50, 50-52, 52-54	54-56, 56-58, 58-60	60-62, 62-64, 64-66	66-68, 68-70, 70-74	74-76	
1	Длина изделия, мм	от 1050 до 1750 мм с шагом 5 мм							± 20
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы (ПО), мм	625	685	745	800	865	920	980	± 20
3	Ширина изделия внизу (ПО), мм	625	685	745	800	865	920	980	± 20
4	Длина рукава + длина плеча, мм 4.1 на резинке 4.2 на манжете	4.1:774 4.2:781	4.1:782 4.2:789	4.1:790 4.2:797	4.1:798 4.2:805	4.1:806 4.2:813	4.1:814 4.2:821	4.1: 822 4.2: 829	± 20
5	Ширина рукава внизу (ПО), мм 5.1 на резинке 5.2 на манжете	5.1: 90 5.2: 60	5.1: 95 5.2: 60	5.1:100 5.2: 60	5.1:105 5.2: 60	5.1:110 5.2: 60	5.1:115 5.2: 60	5.1: 120 5.2: 60	± 20
6	Пояс (длина x ширина), мм	830x40	830x40	830x40	830x40	830x40	830x40	830x40	± 20
7	Липа (длина x ширина), мм	50x20	50x20	50x20	50x20	50x20	50x20	50x20	± 20
8	Завязки (длина x ширина), мм	200x10	200x10	200x10	200x10	200x10	200x10	200x10	± 20

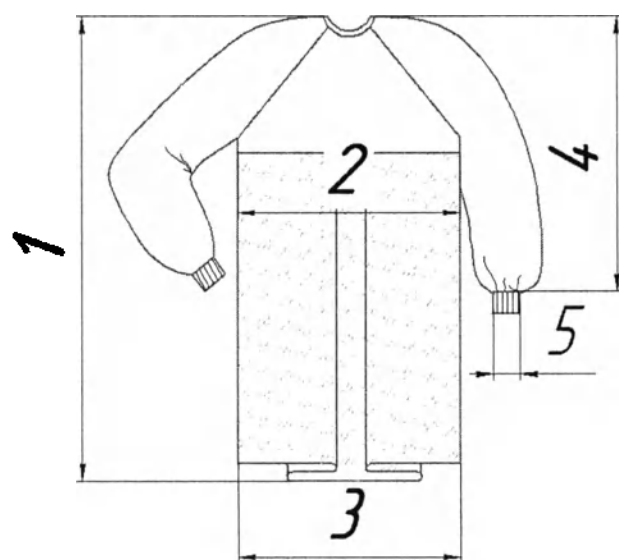

вид спереди

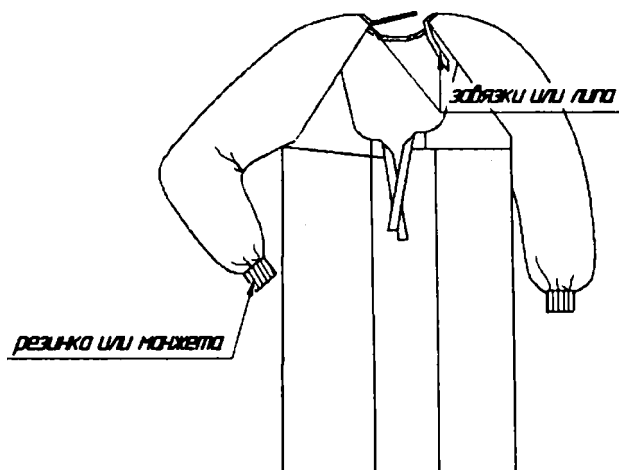

вид сзади

Рис. 5 – Халат медицинский (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете)

Таблица В5 – Габаритные размеры халата медицинского (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, рукав реглан, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42, 42-44	44-46, 46-48	48-50, 50-52, 52-54	54-56, 56-58, 58-60	60-62, 62-64, 64-66	66-68, 68-70, 70-74	74-76	
1	Длина изделия, мм	от 1050 до 1750 мм с шагом 5 мм							± 20
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы (ПО), мм	500	560	620	720	780	860	980	± 20
3	Ширина изделия внизу (ПО), мм	625	685	880	980	1030	1050	1100	± 20
4	Длина рукава + длина плеча, мм 4.1 на резинке 4.2 на манжете	4.1:834 4.2:841	4.1:842 4.2:849	4.1:850 4.2:857	4.1:858 4.2:865	4.1:866 4.2:873	4.1: 874 4.2: 881	4.1:882 4.2:889	± 20
5	Ширина рукава внизу (ПО), мм 5.1 на резинке 5.2 на манжете	5.1: 90 5.2: 60	5.1: 95 5.2: 60	5.1:100 5.2: 60	5.1:105 5.2: 60	5.1:110 5.2: 60	5.1: 115 5.2: 60	5.1:120 5.2: 60	± 20
6	Пояс (длина x ширина), мм	510x40	510x40	510x40	510x40	510x40	510x40	510x40	± 20
7	Липа (длина x ширина), мм	50x20	50x20	50x20	50x20	50x20	50x20	50x20	± 20
8	Завязки (длина x ширина), мм	200x10	200x10	200x10	200x10	200x10	200x10	200x10	± 20

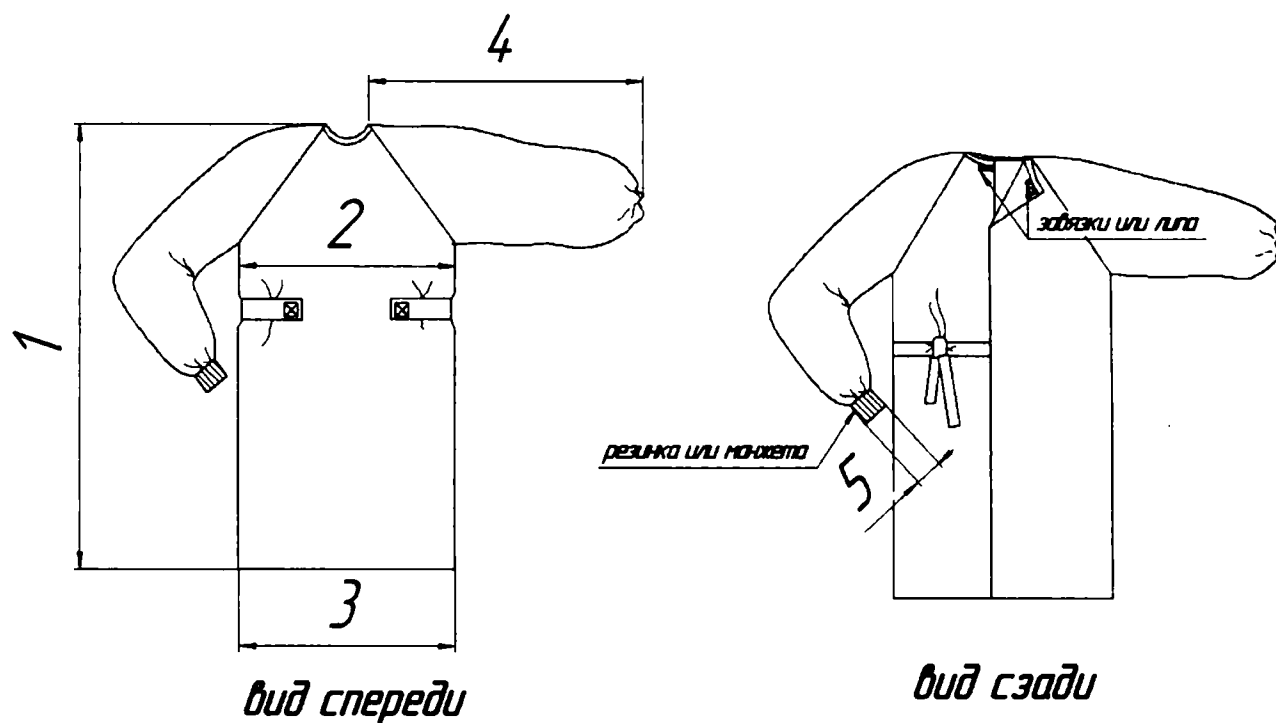


Рис. 6 – Халат медицинский «Евростандарт» (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, с застежкой сзади, запах на спине, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, 4 пояса)

Таблица В6 – Габаритные размеры халата медицинского «Евростандарт» (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, с застежкой сзади, запах на спине, горловина на завязках или на липе, рукава на резинке или на манжете, 4 пояса)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42, 42-44	44-46, 46-48	48-50, 50-52, 52-54	54-56, 56-58, 58-60	60-62, 62-64, 64-66	66-68, 68-70, 70-74	74-76	
1	Длина изделия, мм	от 1050 до 1750 мм с шагом 5 мм							± 20
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы (ПО), мм	690	750	810	870	930	990	1050	± 20
3	Ширина изделия внизу (ПО), мм	690	750	810	870	930	990	1050	± 20
4	Длина рукава+ длина плеча, мм 4.1 на резинке 4.2 на манжете	4.1:786 4.2:793	4.1:792 4.2:799	4.1:800 4.2:807	4.1:808 4.2:815	4.1:816 4.2:823	4.1:824 4.2:831	4.1: 832 4.2: 839	± 20
5	Ширина рукава внизу (ПО), мм 5.1 на резинке 5.2 на манжете	5.1: 90 5.2: 60	5.1: 95 5.2: 60	5.1:100 5.2: 60	5.1:105 5.2: 60	5.1:110 5.2: 60	5.1:115 5.2: 60	5.1: 120 5.2: 60	± 20
6	Пояс (длина x ширина), мм	830x40	830x40	830x40	830x40	830x40	830x40	830x40	± 20
7	Липа (длина x ширина), мм	100x20	100x20	100x20	100x20	100x20	100x20	100x20	± 20
8	Завязки (длина x ширина), мм	200x10	200x10	200x10	200x10	200x10	200x10	200x10	± 20

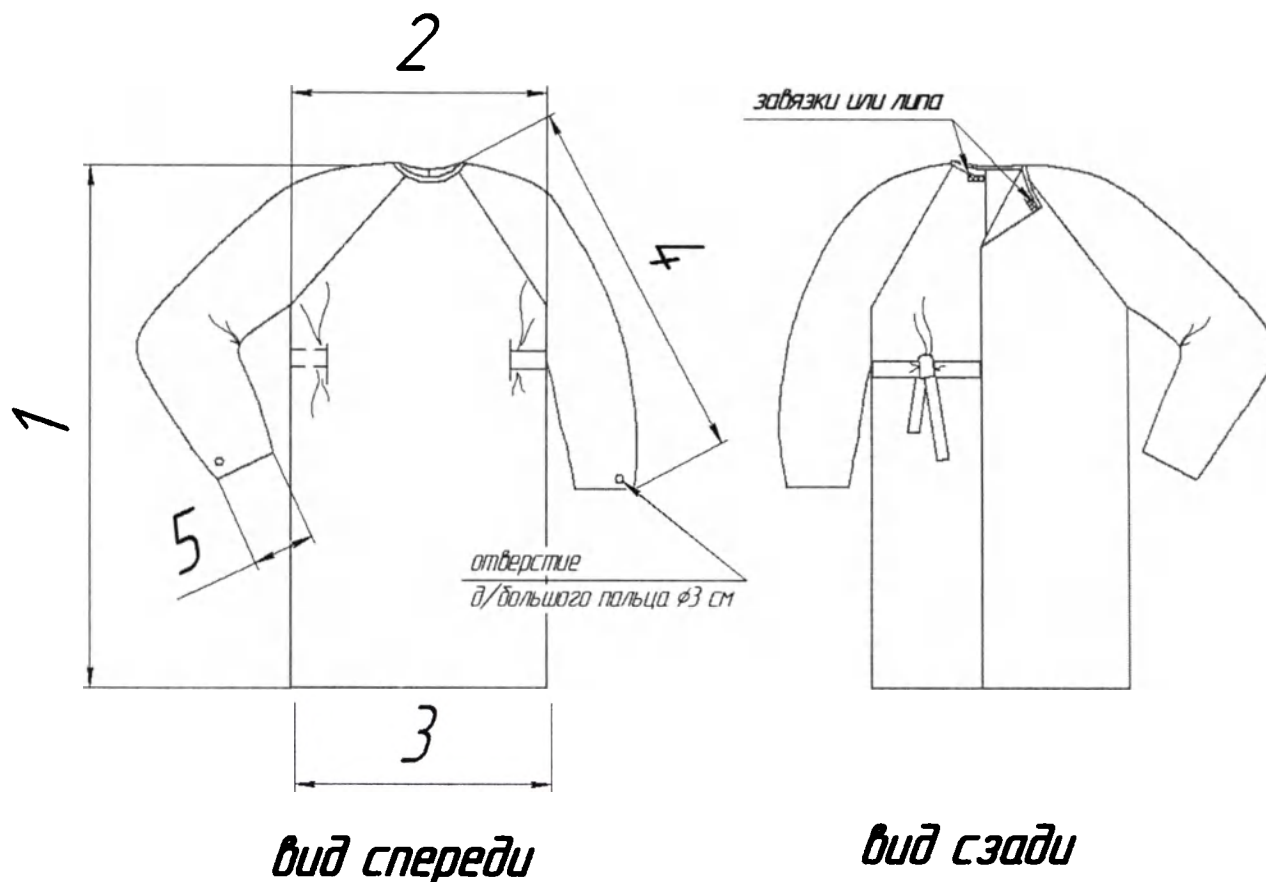


Рис. 7 – Халат медицинский «Евростандарт» (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, с застежкой сзади, запах на спине, горловина на завязках или на липе, рукав с отверстием для пальца, 4 пояса)

Таблица В7 – Габаритные размеры халата медицинского «Евростандарт» (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, с застежкой сзади, запах на спине, горловина на завязках или на липе, рукав с отверстием для пальца, 4 пояса)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42, 42-44	44-46, 46-48	48-50, 50-52, 52-54	54-56, 56-58, 58-60	60-62, 62-64, 64-66	66-68, 68-70, 70-74	74-76	
1	Длина изделия, мм	от 1050 до 1750 мм с шагом 5 мм							± 20
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы (ПО), мм	690	750	810	870	930	990	1050	± 20
3	Ширина изделия внизу (ПО), мм	690	750	810	870	930	990	1050	± 20
4	Длина рукава+ длина плеча, мм	794	802	810	808	816	824	832	± 20
5	Ширина рукава внизу (ПО), мм	140	150	160	170	180	190	200	± 20
6	Пояс (длина х ширина), мм	830х40	830х40	830х40	830х40	830х40	830х40	830х40	± 20
7	Липа (длина х ширина), мм	100х20	100х20	100х20	100х20	100х20	100х20	100х20	± 20
8	Завязки (длина х ширина), мм	200х10	200х10	200х10	200х10	200х10	200х10	200х10	± 20

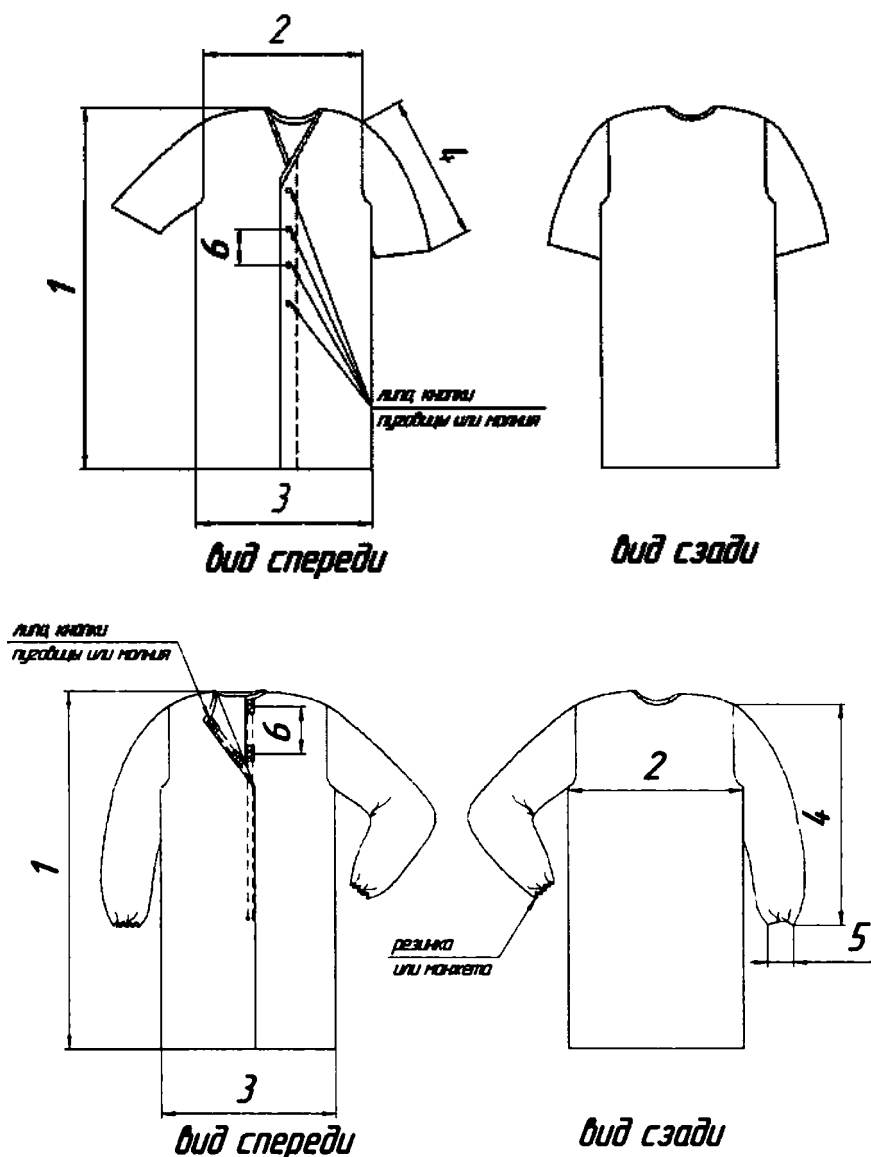


Рис. 8 – Халат стандартного покроя (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, с воротником или без воротника, рукава на резинке или на манжете, или короткий рукав, застежка на кнопках или на пуговицах или на липах или на молнии, с карманами или без карманов)

Таблица В8 – Габаритные размеры халата стандартного покроя (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, с воротником или без воротника, рукава на резинке или на манжете, или короткий рукав, застежка на кнопках или на пуговицах или на липах или на молнии, с карманами или без карманов)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42, 42-44	44-46, 46-48	48-50, 50-52, 52-54	54-56, 56-58, 58-60	60-62, 62-64, 64-66	66-68, 68-70, 70-74	74-76	
1	Длина изделия, мм	от 1050 до 1750 мм с шагом 5 мм							± 20
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы (ПО), мм	550	600	650	710	770	830	880	± 20
3	Ширина изделия внизу (ПО), мм	550	600	650	710	770	830	880	± 20
4	Длина рукава, мм 4.1 на резинке 4.2 на манжете 4.3 короткий рукав	4.1:650 4.2:657 4.3:395	4.1:655 4.2:662 4.3:400	4.1:660 4.2:667 4.3:405	4.1:665 4.2:672 4.3:410	4.1:670 4.2:677 4.3:415	4.1:675 4.2:682 4.3:420	4.1:680 4.2:687 4.3:425	± 20
5	Ширина рукава внизу (ПО), мм 5.1 на резинке 5.2 на манжете	5.1: 90 5.2: 60	5.1: 95 5.2: 60	5.1:100 5.2: 60	5.1:105 5.2: 60	5.1:110 5.2: 60	5.1:115 5.2: 60	5.1:120 5.2: 60	± 20
6	Расстояние между кнопками/липой/пуговицами, мм	170	170	170	170	170	170	170	± 20
7	Липа (длина x ширина), мм	30x20	30x20	30x20	30x20	30x20	30x20	30x20	± 20
8	Длина молнии, мм	600	600	600	600	600	600	600	± 20

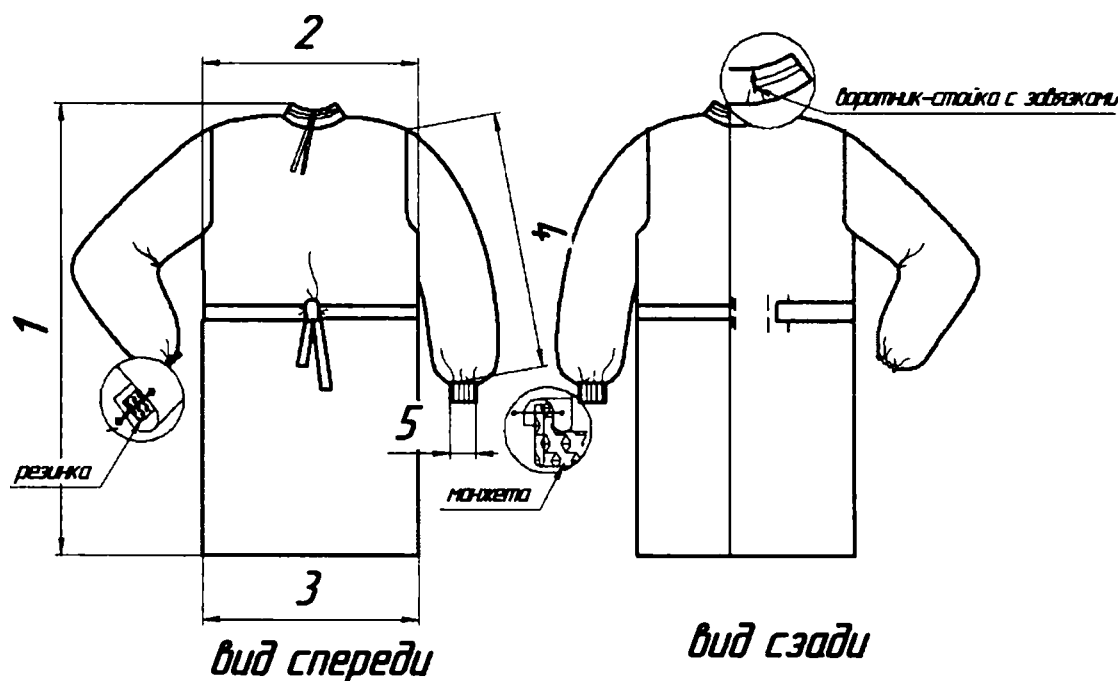


Рис. 9 – Халат специальный противоэпидемический (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, с воротником-стойкой и завязками, рукава на резинке или на манжете, спинка на запахе, на поясе)

Таблица В9 – Габаритные размеры халата специального противоэпидемического (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1750 мм с шагом 5 мм, с воротником-стойкой и завязками, рукава на резинке или на манжете, спинка на запахе, на поясе)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42, 42-44	44-46, 46-48	48-50, 50-52, 52-54	54-56, 56-58, 58-60	60-62, 62-64, 64-66	66-68, 68-70, 70-74	74-76	
1	Длина изделия, мм	от 1050 до 1750 мм с шагом 5 мм							± 20
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы (ПО), мм	680	740	800	860	920	980	1040	± 20
3	Ширина изделия внизу (ПО), мм	680	740	800	860	920	980	1040	± 20
4	Длина рукава, мм 4.1 на резинке 4.2 на манжете	4.1:554 4.2:561	4.1: 562 4.2: 569	4.1:570 4.2:577	4.1:578 4.2:585	4.1:586 4.2:593	4.1:594 4.2:601	4.1: 602 4.2: 609	± 20
5	Ширина рукава внизу (ПО), мм 5.1 на резинке 5.2 на манжете	5.1: 90 5.2: 60	5.1: 95 5.2: 60	5.1:100 5.2: 60	5.1:105 5.2: 60	5.1:110 5.2: 60	5.1: 115 5.2: 60	5.1: 120 5.2: 60	± 20
6	Пояс (длина х ширина), мм	980х50	980х50	980х50	980х50	980х50	980х50	980х50	± 20
7	Завязки (длина х ширина), мм	400х30	400х30	400х30	400х30	400х30	400х30	400х30	± 20

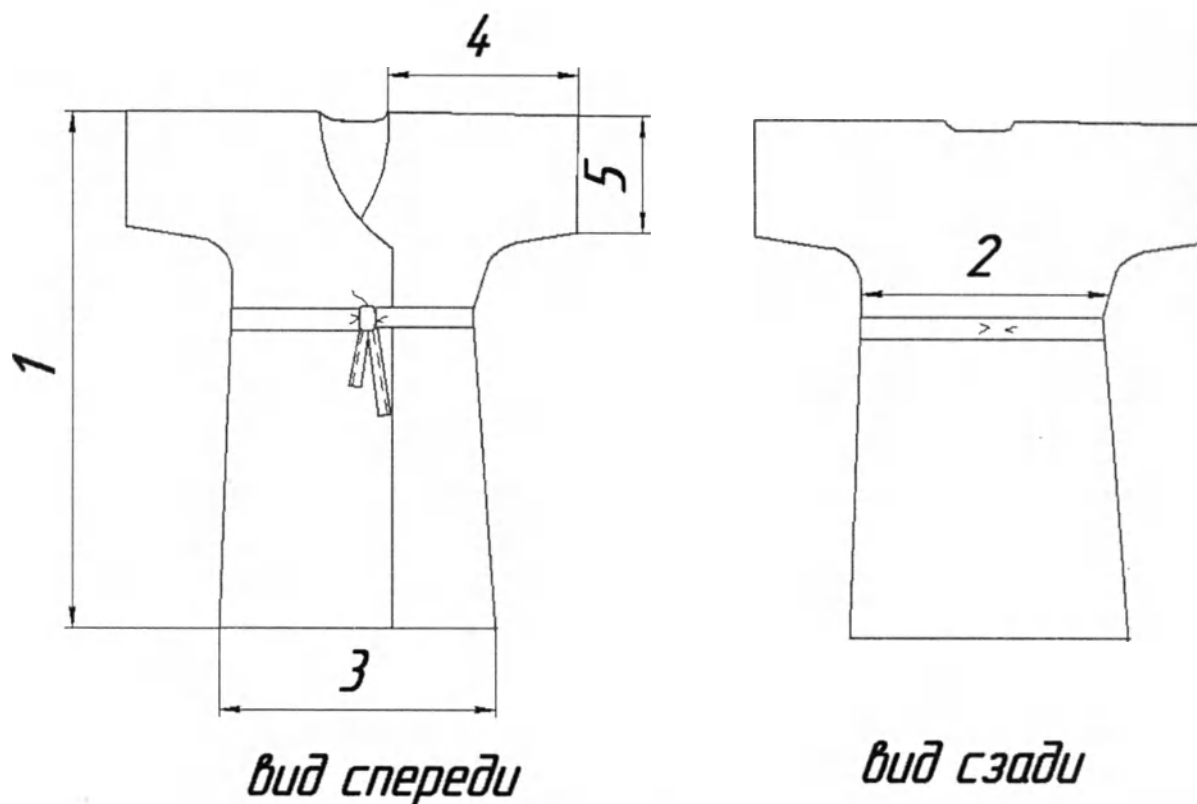


Рис. 10 – Халат-кимоно (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1400 мм с шагом 5 мм, на запахе спереди, на поясе)

Таблица В10 – Габаритные размеры халата-кимоно (размеры 40-42, 42-44, 44-46, 46-48, 48-50, 50-52, 52-54, 54-56, 56-58, 58-60, 60-62, 62-64, 64-66, 66-68, 68-70, 70-74, 74-76, длина 1050-1400 мм с шагом 5 мм, на запахе спереди, на поясе)

Обозначение	Наименование измерения	Размер							Допуск, %
		40-42, 42-44	44-46, 46-48	48-50, 50-52, 52-54	54-56, 56-58, 58-60	60-62, 62-64, 64-66	66-68, 68-70, 70-74	74-76	
1	Длина изделия, мм	от 1050 до 1400 мм с шагом 5 мм							± 20
2	Ширина изделия на уровне глубины проймы (ПО), мм	920	920	920	920	980	980	980	± 20
3	Ширина изделия внизу (ПО), мм	920	920	920	920	980	980	980	± 20
4	Длина рукава, мм	690	690	690	690	720	720	720	± 20
5	Ширина рукава (ПО), мм	290	290	290	290	310	310	310	± 20
6	Пояс (длина х ширина), мм	2000х50	2000х50	2000х50	2000х50	2100х50	2100х50	2100х50	± 20

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

23 (двадцать три) листов

Генеральный директор
ООО «Здравмедтех-Н»

А.И. Железнов

