

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会暨中国国际商会
China Council for the Promotion of International Trade is China Chamber of International Commerce

01508583

中国国际贸易促进委员会



China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



号码 No. 233700B2/004585

兹证明：在所附文件上的湖南埃普特医疗器械有限公司的印章属实。



THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of APT MEDICAL INC on the annexed DOCUMENT is genuine.



China Council for the Promotion
of International Trade

授权签字:

Authorized

Signature:


Wei Shanshan

日期：2023年10月19日

(Date: Oct. 19, 2023)

证明书查询网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

APPROVED BY
General Manager

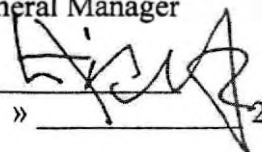
« » 2023

Zhenghui Cheng

2023/9/28



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Проводник гидрофильный APT Medical»
(APT Medical Inc. («АПТ Медикал Инк.»), Китай)



2023

Оглавление

1. Наименование изделия, информация о производителе, классификация.....	3
Ассортимент изделия.....	3
Производитель	23
Место производства.....	24
2. Назначение и применения изделия	24
Назначение.....	24
Вид контакта с организмом	24
Условия применения.....	24
3. Особые свойства изделия.....	24
Принцип действия.....	24
<i>Таблица 1. Внутренний диаметр совместимых катетеров (не входят в комплект поставки)</i>	<i>24</i>
Описание изделия	24
4. Общие показания, противопоказания и побочные эффекты	25
Показания.....	25
Противопоказания	25
Потенциальные осложнения.....	25
5. Меры предосторожности.....	26
Предупреждения	26
6. Инструкции по применению	27
7. Техническая спецификация	27
<i>Таблица 2. Формы кончиков проводника.....</i>	<i>27</i>
<i>Таблица 3. Типы шайфа проводника.....</i>	<i>28</i>
<i>Таблица 4. Материалы, из которых изготовлено изделие</i>	<i>28</i>
<i>Таблица 5. Технические характеристики изделия</i>	<i>29</i>
Комплект поставки изделия	40
8. Маркировка и упаковка	40
9. Соответствие стандартам Российской Федерации	42
10. Транспортирование, хранение и эксплуатация	43
11. Сведения о стерильности изделия	43
12. Сведения об утилизации	43
13. Гарантии	43

1. Наименование изделия, информация о производителе, классификация

«Проводник гидрофильный APTMedical» (далее по тексту - изделие, проводник)

Ассортимент изделия

Проводник гидрофильный APTMedical, в вариантах исполнения:

1. 10A11812, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 120 см, изогнутый кончик, стандартный шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
2. 10A11815, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 150 см, изогнутый кончик, стандартный шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
3. 10A11818, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 180 см, изогнутый кончик, стандартный шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
4. 10A11822, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 220 см, изогнутый кончик, стандартный шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
5. 10A11826, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 260 см, изогнутый кончик, стандартный шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
6. 10A11830, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 300 см, изогнутый кончик, стандартный шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
7. 10A12504, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 45 см, изогнутый кончик, стандартный шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
8. 10A12508, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 80 см, изогнутый кончик, стандартный шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
9. 10A12512, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 120 см, изогнутый кончик, стандартный шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
10. 10A12515, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 150 см, изогнутый кончик, стандартный шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
11. 10A12518, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 180 см, изогнутый кончик, стандартный шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.

12. 10A12522, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 220 см, изогнутый кончик, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

13. 10A12526, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 260 см, изогнутый кончик, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

14. 10A12530, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 300 см, изогнутый кончик, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

15. 10A22515, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 150 см, изогнутый кончик, жесткий шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

16. 10A22518, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 180 см, изогнутый кончик, жесткий шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

17. 10A13212, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 120 см, изогнутый кончик, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

18. 10A13215, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 150 см, изогнутый кончик, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

19. 10A13218, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 180 см, изогнутый кончик, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

20. 10A13222, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 220 см, изогнутый кончик, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

21. 10A13226, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 260 см, изогнутый кончик, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

22. 10A13230, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 300 см, изогнутый кончик, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

23. 10A13240, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 400 см, изогнутый кончик, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

24. 10A13245, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 450 см, изогнутый кончик, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

25. 10A23215, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 150 см, изогнутый кончик, жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
26. 10A23218, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 180 см, изогнутый кончик, жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
27. 10A13504, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 45 см, изогнутый кончик, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
28. 10A13508, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 80 см, изогнутый кончик, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
29. 10A13512, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 120 см, изогнутый кончик, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
30. 10A13515, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, изогнутый кончик, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
31. 10A13518, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, изогнутый кончик, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
32. 10A13522, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 220 см, изогнутый кончик, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
33. 10A13526, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, изогнутый кончик, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
34. 10A13530, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 300 см, изогнутый кончик, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
35. 10A13540, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 400 см, изогнутый кончик, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
36. 10A13545, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 450 см, изогнутый кончик, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
37. 10A23515, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, изогнутый кончик, жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.

38. 10A23518, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, изогнутый кончик, жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
39. 10A23522, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 220 см, изогнутый кончик, жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
40. 10A23526, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, изогнутый кончик, жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
41. 10A23540, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 400 см, изогнутый кончик, жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
42. 10A23545, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 450 см, изогнутый кончик, жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
43. 10A33515, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, изогнутый кончик, очень жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
44. 10A33518, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, изогнутый кончик, очень жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
45. 10A33522, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 220 см, изогнутый кончик, очень жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
46. 10A33526, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, изогнутый кончик, очень жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
47. 10A33530, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 300 см, изогнутый кончик, очень жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
48. 10A33540, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 400 см, изогнутый кончик, очень жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
49. 10A33545, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 450 см, изогнутый кончик, очень жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
50. 10A13812, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 120 см, изогнутый кончик, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.

51. 10A13815, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, изогнутый кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

52. 10A13818, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, изогнутый кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

53. 10A13822, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 220 см, изогнутый кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

54. 10A13826, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 260 см, изогнутый кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

55. 10A13830, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 300 см, изогнутый кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

56. 10A23804, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 45 см, изогнутый кончик, жесткий shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

57. 10A23808, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 80 см, изогнутый кончик, жесткий shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

58. 10A23815, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, изогнутый кончик, жесткий shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

59. 10A23818, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, изогнутый кончик, жесткий shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

60. 10A23822, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 220 см, изогнутый кончик, жесткий shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

61. 10A23826, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 260 см, изогнутый кончик, жесткий shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

62. 10A23840, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 400 см, изогнутый кончик, жесткий shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

63. 10A23845, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 450 см, изогнутый кончик, жесткий shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

64. 10A33815, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, изогнутый кончик, очень жесткий shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

65. 10A33818, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, изогнутый кончик, очень жесткий shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

66. 10A33826, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 260 см, изогнутый кончик, очень жесткий shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

67. 10S11812, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 120 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

68. 10S11815, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 150 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

69. 10S11818, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 180 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

70. 10S11822, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 220 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

71. 10S11826, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 260 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

72. 10S11830, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 300 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

73. 10S12504, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 45 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

74. 10S12508, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 80 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

75. 10S12512, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 120 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

76. 10S12515, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 150 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

77. 10S12518, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 180 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

78. 10S12522, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 220 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

79. 10S12526, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 260 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

80. 10S12530, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 300 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

81. 10S13212, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 120 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

82. 10S13215, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 150 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

83. 10S13218, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 180 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

84. 10S13222, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 220 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

85. 10S13226, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 260 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

86. 10S13230, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 300 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

87. 10S13240, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 400 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

88. 10S13245, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 450 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

89. 10S13504, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 45 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

90. 10S13508, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 80 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
91. 10S13512, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 120 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
92. 10S13515, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
93. 10S13518, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
94. 10S13522, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 220 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
95. 10S13526, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
96. 10S13530, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 300 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
97. 10S13540, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 400 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
98. 10S13545, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 450 см, прямой кончик, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
99. 10S23515, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, прямой кончик, жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
100. 10S23518, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, прямой кончик, жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
101. 10S23526, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, прямой кончик, жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
102. 10S33515, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, прямой кончик, очень жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.

103. 10S33518, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, прямой кончик, очень жесткий шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

104. 10S33526, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, прямой кончик, очень жесткий шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

105. 10S13812, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 120 см, прямой кончик, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

106. 10S13815, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, прямой кончик, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

107. 10S13818, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, прямой кончик, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

108. 10S13822, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 220 см, прямой кончик, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

109. 10S13826, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 260 см, прямой кончик, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

110. 10S13830, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 300 см, прямой кончик, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

111. 10S23804, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 45 см, прямой кончик, жесткий шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

112. 10S23808, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 80 см, прямой кончик, жесткий шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

113. 10S23815, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, прямой кончик, жесткий шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

114. 10S23818, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, прямой кончик, жесткий шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

115. 10S23826, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 260 см, прямой кончик, жесткий шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

116. 10S33815, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, прямой кончик, очень жесткий shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

117. 10S33818, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, прямой кончик, очень жесткий shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

118. 10S33826, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 260 см, прямой кончик, очень жесткий shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

119. 10J1181215, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 120 см, кончик R1.5мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

120. 10J1181515, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 150 см, кончик R1.5мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

121. 10J1181815, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 180 см, кончик R1.5мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

122. 10J1182615, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 260 см, кончик R1.5мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

123. 10J1183015, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 300 см, кончик R1.5мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

124. 10J1184015, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 400 см, кончик R1.5мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

125. 10J1251215, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 120 см, кончик R1.5мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

126. 10J1251515, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 150 см, кончик R1.5мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

127. 10J1251815, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 180 см, кончик R1.5мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

128. 10J1252615, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 260 см, кончик R1.5мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

129. 10J1253015, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 300 см, кончик R1.5мм J, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

130. 10J1254015, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 400 см, кончик R1.5мм J, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

131. 10J1321215, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 120 см, кончик R1.5мм J, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

132. 10J1321515, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 150 см, кончик R1.5мм J, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

133. 10J1321815, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 180 см, кончик R1.5мм J, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

134. 10J1322615, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 260 см, кончик R1.5мм J, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

135. 10J1323015, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 300 см, кончик R1.5мм J, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

136. 10J1324015, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 400 см, кончик R1.5мм J, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

137. 10J1351215, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 120 см, кончик R1.5мм J, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

138. 10J1351515, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, кончик R1.5мм J, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

139. 10J1351815, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, кончик R1.5мм J, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

140. 10J1352615, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, кончик R1.5мм J, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

141. 10J1353015, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 300 см, кончик R1.5мм J, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

142. 10J1354015, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 400 см, кончик R1.5мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
143. 10J1381215, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 120 см, кончик R1.5мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
144. 10J1381515, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, кончик R1.5мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
145. 10J1381815, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, кончик R1.5мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
146. 10J1382615, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 260 см, кончик R1.5мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
147. 10J1383015, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 300 см, кончик R1.5мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
148. 10J1384015, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 400 см, кончик R1.5мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
149. 10J1181220, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 120 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
150. 10J1181520, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 150 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
151. 10J1181820, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 180 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
152. 10J1182620, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 260 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
153. 10J1183020, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 300 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
154. 10J1184020, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 400 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.

155. 10J1251220, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 120 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

156. 10J1251520, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 150 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

157. 10J1251820, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 180 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

158. 10J1252620, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 260 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

159. 10J1253020, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 300 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

160. 10J1254020, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 400 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

161. 10J1321220, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 120 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

162. 10J1321520, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 150 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

163. 10J1321820, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 180 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

164. 10J1322620, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 260 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

165. 10J1323020, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 300 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

166. 10J1324020, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 400 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

167. 10J1351220, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 120 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

168. 10J1351520, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
169. 10J1351820, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
170. 10J1352620, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
171. 10J1353020, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 300 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
172. 10J1354020, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 400 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
173. 10J3351520, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, кончик R2мм J, очень жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
174. 10J3351820, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, кончик R2мм J, очень жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
175. 10J3352620, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, кончик R2мм J, очень жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
176. 10J3353020, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 300 см, кончик R2мм J, очень жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
177. 10J1381220, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 120 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
178. 10J1381520, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
179. 10J1381820, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
180. 10J1382620, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 260 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.

181. 10J1383020, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 300 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

182. 10J1384020, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 400 см, кончик R2мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

183. 10J1181230, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 120 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

184. 10J1181530, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 150 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

185. 10J1181830, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 180 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

186. 10J1182630, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 260 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

187. 10J1183030, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 300 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

188. 10J1184030, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,018" (0,46 мм), длина 400 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

189. 10J1250430, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 45 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

190. 10J1250830, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 80 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

191. 10J1251230, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 120 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

192. 10J1251530, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 150 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

193. 10J1251830, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 180 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

194. 10J1252630, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 260 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
195. 10J1253030, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 300 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
196. 10J1254030, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 400 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
197. 10J1321230, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 120 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
198. 10J1321530, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 150 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
199. 10J1321830, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 180 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
200. 10J1322630, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 260 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
201. 10J1323030, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 300 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
202. 10J1324030, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 400 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
203. 10J3321530, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 150 см, кончик R3мм J, очень жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
204. 10J3321830, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 180 см, кончик R3мм J, очень жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
205. 10J3322630, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 260 см, кончик R3мм J, очень жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
206. 10J3323030, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 300 см, кончик R3мм J, очень жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.

207. 10J1350430, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 45 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

208. 10J1350830, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 80 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

209. 10J1351230, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 120 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

210. 10J1351530, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

211. 10J1351830, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

212. 10J1352630, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

213. 10J1353030, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 300 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

214. 10J1354030, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 400 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

215. 10J3351530, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, кончик R3мм J, очень жесткий shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

216. 10J3351830, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, кончик R3мм J, очень жесткий shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

217. 10J3352630, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, кончик R3мм J, очень жесткий shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

218. 10J1381230, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 120 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

219. 10J1381530, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

220. 10J1381830, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

221. 10J1382630, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 260 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

222. 10J1383030, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 300 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

223. 10J1384030, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 400 см, кончик R3мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

224. 10J2380430, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 45 см, кончик R3мм J, жесткий shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

225. 10J2380830, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 80 см, кончик R3мм J, жесткий shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

226. 10J3381530, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, кончик R3мм J, очень жесткий shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

227. 10J3381830, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, кончик R3мм J, очень жесткий shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

228. 10J3382630, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 260 см, кончик R3мм J, очень жесткий shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

229. 10J12515, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 150 см, кончик R4мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

230. 10J12518, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 180 см, кончик R4мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

231. 10J12526, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,025" (0,64 мм), длина 260 см, кончик R4мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

232. 10J13215, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 150 см, кончик R4мм J, стандартный shaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

233. 10J13218, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 180 см, кончик R4мм J, стандартный шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
234. 10J13226, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,032" (0,81 мм), длина 260 см, кончик R4мм J, стандартный шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
235. 10J13515, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, кончик R4мм J, стандартный шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
236. 10J13518, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, кончик R4мм J, стандартный шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
237. 10J13526, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, кончик R4мм J, стандартный шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
238. 10J23515, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, кончик R4мм J, жесткий шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
239. 10J23518, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, кончик R4мм J, жесткий шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
240. 10J23526, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, кончик R4мм J, жесткий шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
241. 10J33515, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, кончик R4мм J, очень жесткий шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
242. 10J33518, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, кончик R4мм J, очень жесткий шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
243. 10J33526, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, кончик R4мм J, очень жесткий шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
244. 10J33530, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 300 см, кончик R4мм J, очень жесткий шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
245. 10J13815, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, кончик R4мм J, стандартный шaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.

246. 10J13818, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, кончик R4мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
247. 10J13826, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 260 см, кончик R4мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
248. 10J23815, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, кончик R4мм J, жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
249. 10J23818, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, кончик R4мм J, жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
250. 10J23826, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 260 см, кончик R4мм J, жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
251. 10J33815, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, кончик R4мм J, очень жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
252. 10J33818, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, кончик R4мм J, очень жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
253. 10J33826, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 260 см, кончик R4мм J, очень жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
254. 10J33830, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 300 см, кончик R4мм J, очень жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
255. 10J1351560, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, кончик R6мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
256. 10J1351860, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, кончик R6мм J, стандартный shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
257. 10J2381560, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, кончик R6мм J, жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.
258. 10J2381860, в составе:
-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, кончик R6мм J, жесткий shaft – 5 шт.
-Инструкция по применению - 1 шт.

259. 10J3381560, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 150 см, кончик R6мм J, очень жесткий шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

260. 10J3381860, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,038" (0,97 мм), длина 180 см, кончик R6мм J, очень жесткий шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

261. 10B1351550, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, кончик с В изгибом, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

262. 10B1351850, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, кончик с В изгибом, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

263. 10B1352650, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, кончик с В изгибом, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

264. 10B1351580, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, кончик с В изгибом, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

265. 10B1351880, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, кончик с В изгибом, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

266. 10B1352680, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, кончик с В изгибом, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

267. 10C13515, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 150 см, кончик с С изгибом, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

268. 10C13518, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 180 см, кончик с С изгибом, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению - 1 шт.

269. 10C13526, в составе:

-Проводник гидрофильный APTMedical, номинальный диаметр 0,035" (0,89 мм), длина 260 см, кончик с С изгибом, стандартный шaft – 5 шт.

-Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель

APT Medical Inc. («АПТ Медикал Инк.»), Китай

No.009 Xiangxiang Road, Xiangxiang Economic Development Zone, Xiangxiang City, Hunan Province, P.R. China

Телефон: +86-731-56841398

Факс: +86-731-56841080

E-mail: ra_hn@aptmed.com

Место производства

APT Medical Inc., No. 009, Xiangxiang Road, Xiangxiang Economic Development Zone, Xiangxiang City, Hunan, 411400, P.R. China

2. Назначение и применения изделия

Назначение

Изделие предназначено для доставки катетера в нужное коронарное или периферическое анатомическое место во время интервенционной процедуры.

Вид контакта с организмом

Кратковременный контакт с циркулирующей кровью.

Условия применения

Медицинские учреждения; изделие должно использоваться только врачом, обученным ангиографии или интервенционным чрескожным процедурам. Изделие применяется для пациентов, которым показаны диагностические или интервенционные процедуры с использованием проводника для направления катетера или других изделий.

3. Особые свойства изделия

Принцип действия

Проводник направляется в целевое место из периферического сосуда путем чрескожной пункции. После этого катетер направляют в нужное коронарное или периферическое анатомическое место по проводнику, а затем исследуют устье сосуда. Далее вводят контрастное вещество для коронарной ангиограммы.

Таблица 1. Внутренний диаметр совместимых катетеров (не входят в комплект поставки)

Номинальный диаметр проводника	Внутренний диаметр катетера
0,018 дюйма (0,46 мм), 0,025 дюйма (0,64 мм), 0,032 дюйма (0,81 мм), 0,035 дюйма (0,89 мм)	0,97 ± 0,02 мм
0,038 дюйма (0,97 мм)	1,22 ± 0,02 мм

Описание изделия

Проводник гидрофильный APTMedical состоит из shaft и дистального кончика. Проводник изготовлен из встроенного неподвижного нитинолового ядра и полиуретановой оболочки с гидрофильным покрытием на поверхности. Цельная конструкция обеспечивает отличную маневренность. Нитиноловое ядро обеспечивает суперэластичность, превосходную устойчивость к перегибам, а отличный контроль крутящего момента позволяет проводнику легко и успешно добраться до цели. Полиуретановая оболочка, содержащая вольфрам, обеспечивает превосходную видимость под рентгеновским излучением, что также облегчает позиционирование и эксплуатацию проводника. Покрытие без трения имеет очень низкий потенциал для образования сгустков крови на поверхности проводника. Более того, гидрофильное покрытие может значительно уменьшить трение в

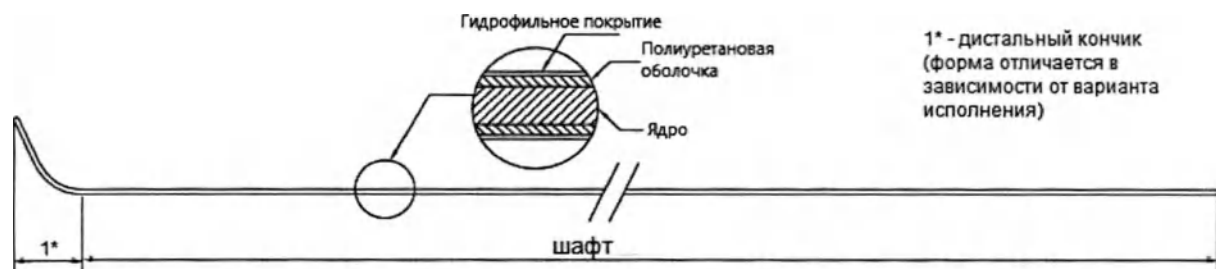


Рисунок 1. Чертеж проводника

крови и обеспечить удобное продвижение самого проводника и других изделий, в то же время покрытие может значительно уменьшить повреждение кровеносных сосудов.

Проводник гидрофильный ARTMedical имеет варианты исполнения со следующими номинальными диаметрами: 0,018 дюйма (0,46 мм), 0,025 дюйма (0,64 мм), 0,032 дюйма (0,81 мм), 0,035 дюйма (0,89 мм) и 0,038 дюйма (0,97 мм), а также длинами: 45 см, 80 см, 120 см, 150 см, 180 см, 220 см, 260 см, 300 см, 400 см и 450 см (более подробно в таблице 5). Кроме того, изделия могут быть классифицированы как «стандартные», «жесткие» и «очень жесткие» в соответствии с различным уровнем мягкости shaft. Проводник может иметь следующие формы дистального кончика: «Изогнутый», «R1.5мм J», «R2мм J», «R3мм J», «R4мм J», «R6мм J», «Прямой», «В изгиб» и «С изгиб».

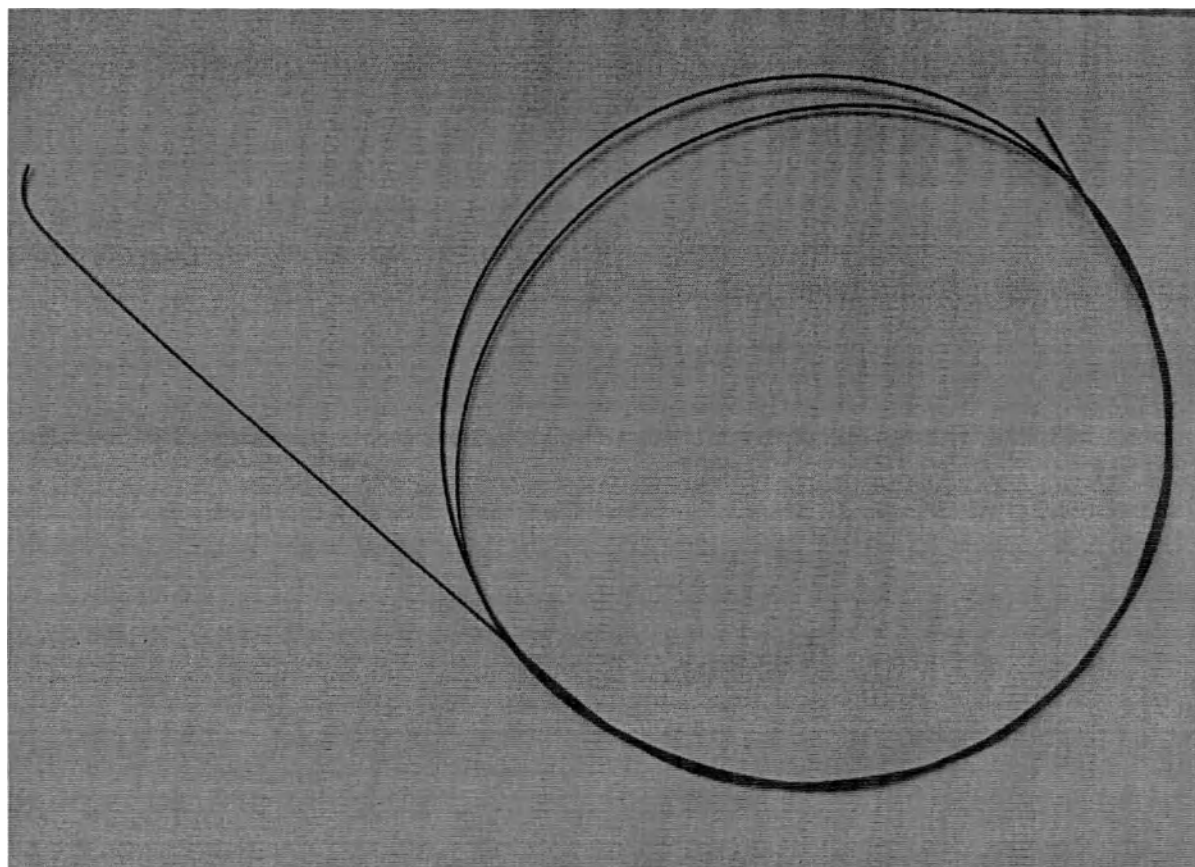


Рисунок 2. Внешний вид проводника с изогнутым кончиком (форма дистального кончика отличается в зависимости от варианта исполнения)

4. Общие показания, противопоказания и побочные эффекты

Показания

Изделие предназначено для доставки катетера в нужное коронарное или периферическое анатомическое место во время интервенционной процедуры.

Противопоказания

Информация о противопоказаниях, известных при использовании проводников во время проведения хирургических операций на сосудах, отсутствует. Внимательно прочитайте список противопоказаний в инструкциях по применению других интервенционных изделий при их использовании с проводниками.

Потенциальные осложнения

Неправильное использование во время операции может вызвать следующие осложнения:

- анафилактическая реакция;

- местная или системная инфекция;
- кровоизлияние или гематома;
- воздушная эмболия;
- травмирование ткани;
- перфорация сосудов;
- тромбообразование.

5. Меры предосторожности

- Внимательно прочтите инструкцию перед использованием данного изделия, так как это снижает потенциальную опасность во время работы.
- Перед использованием проверьте все компоненты, фармацевтические препараты и медицинское оборудование для совместного использования.
- Весь процесс должен проходить в стерильной среде.
- Форма кончика и размер изделия должны быть выбраны надлежащим образом с учетом места диагностики и анатомии.
- Данное изделие должно использоваться только врачом, обученным ангиографии или интервенционным чрескожным процедурам.
- Изделие должно быть использовано до даты «Использовать до», указанной на упаковке.
- Не используйте, если упаковка повреждена/загрязнена или изделие повреждено.
- Изделие следует использовать сразу после вскрытия упаковки. После операции изделие следует убрать в соответствии с требованиями местной гигиены.
- Проводник гидрофильный APTMedical можно использовать только в медицинских учреждениях, которые обеспечены подобным оборудованием и персоналом. Возможности лаборатории должны включать, но не ограничиваться:
 - измерением артериального давления, ЭКГ и насыщения оксигемоглобином;
 - возможностью введения контрастного вещества и управления последовательными побочными реакциями;
 - хирургической поддержкой;
 - антикоагулянтной терапией и возможностью мониторинга;
 - постоянным мониторингом жизненных показателей на протяжении всей операции.

Предупреждения

- Стерилизация окисью этилена только для однократного использования.
- Не подвергать повторной стерилизации.
- Не модифицировать изделие каким-либо образом.
- Не использовать повторно. После использования невозможно полностью удалить все биологические материалы и посторонние предметы, поэтому повторное использование может привести к неблагоприятной реакции пациентов.
- Остановить работу при возникновении сопротивления. Определить причину с помощью рентгеноскопа.
- Не прилагать повторяющееся усилие на изгиб в одной конкретной точке изделия, так как это может привести к повреждению проводника гидрофильного APTMedical.
- Не вращать изделие в гибком сосуде непрерывно.
- Применять соответствующую антикоагулянтную терапию во время длительной операции.
- Не использовать изделие с несовместимым катетером, затрудняющим введение изделия.
- Проверять расположение и активность проводника под рентгеном при проведении в орган.
- Не протирать изделие марлей, в противном случае гидрофильное покрытие может

быть повреждено.

- Не допускать контакта проводника с органическим растворителем, таким как спирт, поскольку он может повредить гидрофильное покрытие.
- Не изменять форму проводника.
- Не пытаться ввести проводник в перекрученный или изогнутый катетер.
- Не использовать изделие совместно с изделиями, имеющими металлическую часть, такими как металлические расширители, катетер для атерэктомии, в противном случае изделие может быть повреждено или разорвано.

6. Инструкции по применению

- Проверьте состояние упаковки и изделия и используйте проводник только при отсутствии отклонений от нормы.
- Извлеките проводник вместе с защитным ободом из упаковки в стерильную зону, а затем шприцем введите гепаринизированный физиологический раствор в защитный обод, чтобы смочить поверхность для активации гидрофильного покрытия.
- Выньте проводник из защитного обода. Продолжайте вводить гепаринизированный физиологический раствор при наличии сопротивления и перед использованием проверьте гладкость поверхности рукой.
- Промойте просвет катетера гепаринизированным физиологическим раствором, чтобы обеспечить перемещение проводника в катетере без трения.
- Держите проксимальный конец проводника на расстоянии не менее 5 см от катетера во время введения смоченного проводника в полость катетера.
- Введите проводник в кровеносный сосуд и продвиньте к целевому участку под рентгеновским излучением.
- Проведите катетер по проводнику, который находится в целевом месте.

7. Техническая спецификация

Таблица 2. Формы кончиков проводника

Форма кончика	Изображение
Изогнутый	
R1.5mm J	
R2mm J	
R3mm J	
R4mm J	

Форма кончика	Изображение
R6мм J	
Прямой	
В изгиб	
С изгиб	

Все 3 типа shaft изготовлены из неподвижного нитинолового ядра и полиуретановой оболочки с гидрофильным покрытием на поверхности. Материалы, используемые для 3 типов, идентичны. Разница между типами обусловлена различным диаметром ядра при одинаковом диаметре проводника.

Таким образом, при одинаковом диаметре проводников, изделие с меньшим диаметром ядра относится к стандартному типу с более толстой полиуретановой оболочкой; изделие с большим диаметром ядра - к жесткому типу с более тонкой полиуретановой оболочкой; а с наибольшим диаметром ядра - к очень жесткому типу с самой тонкой полиуретановой оболочкой.

Таблица 3. Типы shaft проводника

Номинальный диаметр	Максимальный диаметр ядра (мм)		
	Стандартный shaft	Жесткий shaft	Очень жесткий shaft
0,018" (0,46 мм)	0,36	/	/
0,025" (0,64 мм)	0,38	0,46	/
0,032" (0,81 мм)	0,49	0,56	0,68
0,035" (0,89 мм)	0,51	0,58	0,68
0,038" (0,97 мм)	0,51	0,58	0,68

Таблица 4. Материалы, из которых изготовлено изделие

Компонент изделия	Материал
Shaft проводника	Полиуретан, 40 % вольфрам; черный
Ядро проводника	Нитинол
Гидрофильное покрытие	Поливинилпирролидон (ПВП)
Индивидуальная упаковка	Полиэтиленовая пленка
	Воздухопроницаемая бумага Tyvek

Таблица 5. Технические характеристики изделия

REF	Номинальный диаметр проводника, дюйм (мм) (согласно маркировке)	Внешний диаметр проводника D1, мм ($\pm 0,05$ мм)	Общая длина проводника L1, см ($\pm 5\%$)	Диаметр ядра D2, мм ($\pm 0,05$ мм)	Диаметр изгиба D3, мм (± 1 мм)	Длина кончика L2, мм (± 1 мм)	Угол изгиба, ° ($\pm 5^\circ$)	Длина гибкого кончика, мм ($\pm 5\%$)	Форма кончика	Тип shaft
10A11812	0,018" (0,46)	0,43	120	0,36	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A11815	0,018" (0,46)	0,43	150	0,36	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A11818	0,018" (0,46)	0,43	180	0,36	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A11822	0,018" (0,46)	0,43	220	0,36	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A11826	0,018" (0,46)	0,43	260	0,36	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A11830	0,018" (0,46)	0,43	300	0,36	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A12504	0,025" (0,64)	0,60	45	0,38	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A12508	0,025" (0,64)	0,60	80	0,38	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A12512	0,025" (0,64)	0,60	120	0,38	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A12515	0,025" (0,64)	0,60	150	0,38	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A12518	0,025" (0,64)	0,60	180	0,38	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A12522	0,025" (0,64)	0,60	220	0,38	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A12526	0,025" (0,64)	0,60	260	0,38	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A12530	0,025" (0,64)	0,60	300	0,38	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A22515	0,025" (0,64)	0,60	150	0,46	18	3	50	30	Изогнутый	Жесткий
10A22518	0,025" (0,64)	0,60	180	0,46	18	3	50	30	Изогнутый	Жесткий
10A13212	0,032" (0,81)	0,77	120	0,49	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A13215	0,032" (0,81)	0,77	150	0,49	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A13218	0,032" (0,81)	0,77	180	0,49	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A13222	0,032" (0,81)	0,77	220	0,49	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A13226	0,032" (0,81)	0,77	260	0,49	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A13230	0,032" (0,81)	0,77	300	0,49	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A13240	0,032" (0,81)	0,77	400	0,49	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A13245	0,032" (0,81)	0,77	450	0,49	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный

REF	Номинальный диаметр проводника, дюйм (мм) (согласно маркировке)	Внешний диаметр проводника D1, мм ($\pm 0,05$ мм)	Общая длина проводника L1, см ($\pm 5\%$)	Диаметр ядра D2, мм ($\pm 0,05$ мм)	Диаметр изгиба D3, мм (± 1 мм)	Длина кончика L2, мм (± 1 мм)	Угол изгиба, ° ($\pm 5^\circ$)	Длина гибкого кончика, мм ($\pm 5\%$)	Форма кончика	Тип шайфа
10A23215	0,032" (0,81)	0,77	150	0,56	18	3	50	30	Изогнутый	Жесткий
10A23218	0,032" (0,81)	0,77	180	0,56	18	3	50	30	Изогнутый	Жесткий
10A13504	0,035" (0,89)	0,85	45	0,51	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A13508	0,035" (0,89)	0,85	80	0,51	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A13512	0,035" (0,89)	0,85	120	0,51	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A13515	0,035" (0,89)	0,85	150	0,51	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A13518	0,035" (0,89)	0,85	180	0,51	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A13522	0,035" (0,89)	0,85	220	0,51	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A13526	0,035" (0,89)	0,85	260	0,51	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A13530	0,035" (0,89)	0,85	300	0,51	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A13540	0,035" (0,89)	0,85	400	0,51	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A13545	0,035" (0,89)	0,85	450	0,51	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A23515	0,035" (0,89)	0,85	150	0,58	18	3	50	30	Изогнутый	Жесткий
10A23518	0,035" (0,89)	0,85	180	0,58	18	3	50	30	Изогнутый	Жесткий
10A23522	0,035" (0,89)	0,85	220	0,58	18	3	50	30	Изогнутый	Жесткий
10A23526	0,035" (0,89)	0,85	260	0,58	18	3	50	30	Изогнутый	Жесткий
10A23540	0,035" (0,89)	0,85	400	0,58	18	3	50	30	Изогнутый	Жесткий
10A23545	0,035" (0,89)	0,85	450	0,58	18	3	50	30	Изогнутый	Жесткий
10A33515	0,035" (0,89)	0,85	150	0,68	18	3	50	30	Изогнутый	Очень жесткий
10A33518	0,035" (0,89)	0,85	180	0,68	18	3	50	30	Изогнутый	Очень жесткий
10A33522	0,035" (0,89)	0,85	220	0,68	18	3	50	30	Изогнутый	Очень жесткий
10A33526	0,035" (0,89)	0,85	260	0,68	18	3	50	30	Изогнутый	Очень жесткий
10A33530	0,035" (0,89)	0,85	300	0,68	18	3	50	30	Изогнутый	Очень жесткий
10A33540	0,035" (0,89)	0,85	400	0,68	18	3	50	30	Изогнутый	Очень жесткий
10A33545	0,035" (0,89)	0,85	450	0,68	18	3	50	30	Изогнутый	Очень жесткий

REF	Номинальный диаметр проводника, дюйм (мм) (согласно маркировке)	Внешний диаметр проводника D1, мм ($\pm 0,05$ мм)	Общая длина проводника L1, см ($\pm 5\%$)	Диаметр ядра D2, мм ($\pm 0,05$ мм)	Диаметр изгиба D3, мм (± 1 мм)	Длина кончика L2, мм (± 1 мм)	Угол изгиба, ° ($\pm 5^\circ$)	Длина гибкого кончика, мм ($\pm 5\%$)	Форма кончика	Тип shaft
10A13812	0,038" (0,97)	0,93	120	0,51	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A13815	0,038" (0,97)	0,93	150	0,51	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A13818	0,038" (0,97)	0,93	180	0,51	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A13822	0,038" (0,97)	0,93	220	0,51	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A13826	0,038" (0,97)	0,93	260	0,51	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A13830	0,038" (0,97)	0,93	300	0,51	18	3	50	30	Изогнутый	Стандартный
10A23804	0,038" (0,97)	0,93	45	0,58	18	3	50	30	Изогнутый	Жесткий
10A23808	0,038" (0,97)	0,93	80	0,58	18	3	50	50	Изогнутый	Жесткий
10A23815	0,038" (0,97)	0,93	150	0,58	18	3	50	30	Изогнутый	Жесткий
10A23818	0,038" (0,97)	0,93	180	0,58	18	3	50	30	Изогнутый	Жесткий
10A23822	0,038" (0,97)	0,93	220	0,58	18	3	50	30	Изогнутый	Жесткий
10A23826	0,038" (0,97)	0,93	260	0,58	18	3	50	30	Изогнутый	Жесткий
10A23840	0,038" (0,97)	0,93	400	0,58	18	3	50	30	Изогнутый	Жесткий
10A23845	0,038" (0,97)	0,93	450	0,58	18	3	50	30	Изогнутый	Жесткий
10A33815	0,038" (0,97)	0,93	150	0,68	18	3	50	30	Изогнутый	Очень жесткий
10A33818	0,038" (0,97)	0,93	180	0,68	18	3	50	30	Изогнутый	Очень жесткий
10A33826	0,038" (0,97)	0,93	260	0,68	18	3	50	30	Изогнутый	Очень жесткий
10S11812	0,018" (0,46)	0,43	120	0,36	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S11815	0,018" (0,46)	0,43	150	0,36	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S11818	0,018" (0,46)	0,43	180	0,36	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S11822	0,018" (0,46)	0,43	220	0,36	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S11826	0,018" (0,46)	0,43	260	0,36	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S11830	0,018" (0,46)	0,43	300	0,36	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S12504	0,025" (0,64)	0,60	45	0,38	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S12508	0,025" (0,64)	0,60	80	0,38	—	—	—	30	Прямой	Стандартный

REF	Номинальный диаметр проводника, дюйм (мм) (согласно маркировке)	Внешний диаметр проводника D1, мм ($\pm 0,05$ мм)	Общая длина проводника L1, см ($\pm 5\%$)	Диаметр ядра D2, мм ($\pm ,05$ мм)	Диаметр изгиба D3, мм (± 1 мм)	Длина кончика L2, мм (± 1 мм)	Угол изгиба, ° ($\pm 5^\circ$)	Длина гибкого кончика, мм ($\pm 5\%$)	Форма кончика	Тип шайфа
10S12512	0,025" (0,64)	0,60	120	0,38	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S12515	0,025" (0,64)	0,60	150	0,38	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S12518	0,025" (0,64)	0,60	180	0,38	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S12522	0,025" (0,64)	0,60	220	0,38	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S12526	0,025" (0,64)	0,60	260	0,38	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S12530	0,025" (0,64)	0,60	300	0,38	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13212	0,032" (0,81)	0,77	120	0,49	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13215	0,032" (0,81)	0,77	150	0,49	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13218	0,032" (0,81)	0,77	180	0,49	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13222	0,032" (0,81)	0,77	220	0,49	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13226	0,032" (0,81)	0,77	260	0,49	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13230	0,032" (0,81)	0,77	300	0,49	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13240	0,032" (0,81)	0,77	400	0,49	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13245	0,032" (0,81)	0,77	450	0,49	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13504	0,035" (0,89)	0,85	45	0,51	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13508	0,035" (0,89)	0,85	80	0,51	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13512	0,035" (0,89)	0,85	120	0,51	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13515	0,035" (0,89)	0,85	150	0,51	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13518	0,035" (0,89)	0,85	180	0,51	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13522	0,035" (0,89)	0,85	220	0,51	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13526	0,035" (0,89)	0,85	260	0,51	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13530	0,035" (0,89)	0,85	300	0,51	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13540	0,035" (0,89)	0,85	400	0,51	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13545	0,035" (0,89)	0,85	450	0,51	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S23515	0,035" (0,89)	0,85	150	0,58	—	—	—	30	Прямой	Жесткий

REF	Номинальный диаметр проводника, дюйм (мм) (согласно маркировке)	Внешний диаметр проводника D1, мм ($\pm 0,05$ мм)	Общая длина проводника L1, см ($\pm 5\%$)	Диаметр ядра D2, мм ($\pm 0,05$ мм)	Диаметр изгиба D3, мм (± 1 мм)	Длина кончика L2, мм (± 1 мм)	Угол изгиба, ° ($\pm 5^\circ$)	Длина гибкого кончика, мм ($\pm 5\%$)	Форма кончика	Тип шфта
10S23518	0,035" (0,89)	0,85	180	0,58	—	—	—	30	Прямой	Жесткий
10S23526	0,035" (0,89)	0,85	260	0,58	—	—	—	30	Прямой	Жесткий
10S33515	0,035" (0,89)	0,85	150	0,68	—	—	—	30	Прямой	Очень жесткий
10S33518	0,035" (0,89)	0,85	180	0,68	—	—	—	30	Прямой	Очень жесткий
10S33526	0,035" (0,89)	0,85	260	0,68	—	—	—	30	Прямой	Очень жесткий
10S13812	0,038" (0,97)	0,93	120	0,51	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13815	0,038" (0,97)	0,93	150	0,51	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13818	0,038" (0,97)	0,93	180	0,51	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13822	0,038" (0,97)	0,93	220	0,51	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13826	0,038" (0,97)	0,93	260	0,51	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S13830	0,038" (0,97)	0,93	300	0,51	—	—	—	30	Прямой	Стандартный
10S23804	0,038" (0,97)	0,93	45	0,58	—	—	—	30	Прямой	Жесткий
10S23808	0,038" (0,97)	0,93	80	0,58	—	—	—	30	Прямой	Жесткий
10S23815	0,038" (0,97)	0,93	150	0,58	—	—	—	30	Прямой	Жесткий
10S23818	0,038" (0,97)	0,93	180	0,58	—	—	—	30	Прямой	Жесткий
10S23826	0,038" (0,97)	0,93	260	0,58	—	—	—	30	Прямой	Жесткий
10S33815	0,038" (0,97)	0,93	150	0,68	—	—	—	30	Прямой	Очень жесткий
10S33818	0,038" (0,97)	0,93	180	0,68	—	—	—	30	Прямой	Очень жесткий
10S33826	0,038" (0,97)	0,93	260	0,68	—	—	—	30	Прямой	Очень жесткий
10J1181215	0,018" (0,46)	0,43	120	0,36	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1181515	0,018" (0,46)	0,43	150	0,36	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1181815	0,018" (0,46)	0,43	180	0,36	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1182615	0,018" (0,46)	0,43	260	0,36	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1183015	0,018" (0,46)	0,43	300	0,36	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1184015	0,018" (0,46)	0,43	400	0,36	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный

REF	Номинальный диаметр проводника, дюйм (мм) (согласно маркировке)	Внешний диаметр проводника D1, мм (± 0,05 мм)	Общая длина проводника L1, см (± 5 %)	Диаметр ядра D2, мм (± ,05 мм)	Диаметр изгиба D3, мм (± 1 мм)	Длина кончика L2, мм (± 1 мм)	Угол изгиба, ° (± 5°)	Длина гибкого кончика, мм (± 5 %)	Форма кончика	Тип шфта
10J1251215	0,025" (0,64)	0,60	120	0,38	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1251515	0,025" (0,64)	0,60	150	0,38	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1251815	0,025" (0,64)	0,60	180	0,38	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1252615	0,025" (0,64)	0,60	260	0,38	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1253015	0,025" (0,64)	0,60	300	0,38	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1254015	0,025" (0,64)	0,60	400	0,38	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1321215	0,032" (0,81)	0,77	120	0,49	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1321515	0,032" (0,81)	0,77	150	0,49	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1321815	0,032" (0,81)	0,77	180	0,49	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1322615	0,032" (0,81)	0,77	260	0,49	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1323015	0,032" (0,81)	0,77	300	0,49	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1324015	0,032" (0,81)	0,77	400	0,49	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1351215	0,035" (0,89)	0,85	120	0,51	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1351515	0,035" (0,89)	0,85	150	0,51	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1351815	0,035" (0,89)	0,85	180	0,51	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1352615	0,035" (0,89)	0,85	260	0,51	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1353015	0,035" (0,89)	0,85	300	0,51	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1354015	0,035" (0,89)	0,85	400	0,51	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1381215	0,038" (0,97)	0,93	120	0,51	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1381515	0,038" (0,97)	0,93	150	0,51	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1381815	0,038" (0,97)	0,93	180	0,51	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1382615	0,038" (0,97)	0,93	260	0,51	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1383015	0,038" (0,97)	0,93	300	0,51	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1384015	0,038" (0,97)	0,93	400	0,51	3	3	—	30	R1.5мм J	Стандартный
10J1181220	0,018" (0,46)	0,43	120	0,36	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный

REF	Номинальный диаметр проводника, дюйм (мм) (согласно маркировке)	Внешний диаметр проводника D1, мм ($\pm 0,05$ мм)	Общая длина проводника L1, см ($\pm 5\%$)	Диаметр ядра D2, мм ($\pm 0,05$ мм)	Диаметр изгиба D3, мм (± 1 мм)	Длина кончика L2, мм (± 1 мм)	Угол изгиба, ° ($\pm 5^\circ$)	Длина гибкого кончика, мм ($\pm 5\%$)	Форма кончика	Тип shaft
10J1181520	0,018" (0,46)	0,43	150	0,36	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1181820	0,018" (0,46)	0,43	180	0,36	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1182620	0,018" (0,46)	0,43	260	0,36	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1183020	0,018" (0,46)	0,43	300	0,36	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1184020	0,018" (0,46)	0,43	400	0,36	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1251220	0,025" (0,64)	0,60	120	0,38	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1251520	0,025" (0,64)	0,60	150	0,38	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1251820	0,025" (0,64)	0,60	180	0,38	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1252620	0,025" (0,64)	0,60	260	0,38	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1253020	0,025" (0,64)	0,60	300	0,38	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1254020	0,025" (0,64)	0,60	400	0,38	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1321220	0,032" (0,81)	0,77	120	0,49	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1321520	0,032" (0,81)	0,77	150	0,49	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1321820	0,032" (0,81)	0,77	180	0,49	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1322620	0,032" (0,81)	0,77	260	0,49	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1323020	0,032" (0,81)	0,77	300	0,49	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1324020	0,032" (0,81)	0,77	400	0,49	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1351220	0,035" (0,89)	0,85	120	0,51	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1351520	0,035" (0,89)	0,85	150	0,51	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1351820	0,035" (0,89)	0,85	180	0,51	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1352620	0,035" (0,89)	0,85	260	0,51	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1353020	0,035" (0,89)	0,85	300	0,51	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1354020	0,035" (0,89)	0,85	400	0,51	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J3351520	0,035" (0,89)	0,85	150	0,68	4	4	—	30	R2мм J	Очень жесткий
10J3351820	0,035" (0,89)	0,85	180	0,68	4	4	—	30	R2мм J	Очень жесткий

REF	Номинальный диаметр проводника, дюйм (мм) (согласно маркировке)	Внешний диаметр проводника D1, мм ($\pm 0,05$ мм)	Общая длина проводника L1, см ($\pm 5\%$)	Диаметр ядра D2, мм ($\pm ,05$ мм)	Диаметр изгиба D3, мм (± 1 мм)	Длина кончика L2, мм (± 1 мм)	Угол изгиба, ° ($\pm 5^\circ$)	Длина гибкого кончика, мм ($\pm 5\%$)	Форма кончика	Тип шфта
10J3352620	0,035" (0,89)	0,85	260	0,68	4	4	—	30	R2мм J	Очень жесткий
10J3353020	0,035" (0,89)	0,85	300	0,68	4	4	—	30	R2мм J	Очень жесткий
10J1381220	0,038" (0,97)	0,93	120	0,51	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1381520	0,038" (0,97)	0,93	150	0,51	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1381820	0,038" (0,97)	0,93	180	0,51	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1382620	0,038" (0,97)	0,93	260	0,51	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1383020	0,038" (0,97)	0,93	300	0,51	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1384020	0,038" (0,97)	0,93	400	0,51	4	4	—	30	R2мм J	Стандартный
10J1181230	0,018" (0,46)	0,43	120	0,36	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1181530	0,018" (0,46)	0,43	150	0,36	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1181830	0,018" (0,46)	0,43	180	0,36	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1182630	0,018" (0,46)	0,43	260	0,36	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1183030	0,018" (0,46)	0,43	300	0,36	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1184030	0,018" (0,46)	0,43	400	0,36	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1250430	0,025" (0,64)	0,60	45	0,38	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1250830	0,025" (0,64)	0,60	80	0,38	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1251230	0,025" (0,64)	0,60	120	0,38	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1251530	0,025" (0,64)	0,60	150	0,38	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1251830	0,025" (0,64)	0,60	180	0,38	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1252630	0,025" (0,64)	0,60	260	0,38	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1253030	0,025" (0,64)	0,60	300	0,38	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1254030	0,025" (0,64)	0,60	400	0,38	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1321230	0,032" (0,81)	0,77	120	0,49	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1321530	0,032" (0,81)	0,77	150	0,49	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1321830	0,032" (0,81)	0,77	180	0,49	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный

REF	Номинальный диаметр проводника, дюйм (мм) (согласно маркировке)	Внешний диаметр проводника D1, мм ($\pm 0,05$ мм)	Общая длина проводника L1, см ($\pm 5\%$)	Диаметр ядра D2, мм ($\pm 0,05$ мм)	Диаметр изгиба D3, мм (± 1 мм)	Длина кончика L2, мм (± 1 мм)	Угол изгиба, ° ($\pm 5^\circ$)	Длина гибкого кончика, мм ($\pm 5\%$)	Форма кончика	Тип шайфта
10J1322630	0,032" (0,81)	0,77	260	0,49	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1323030	0,032" (0,81)	0,77	300	0,49	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1324030	0,032" (0,81)	0,77	400	0,49	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J3321530	0,032" (0,81)	0,77	150	0,68	6	6	—	30	R3мм J	Очень жесткий
10J3321830	0,032" (0,81)	0,77	180	0,68	6	6	—	30	R3мм J	Очень жесткий
10J3322630	0,032" (0,81)	0,77	260	0,68	6	6	—	30	R3мм J	Очень жесткий
10J3323030	0,032" (0,81)	0,77	300	0,68	6	6	—	30	R3мм J	Очень жесткий
10J1350430	0,035" (0,89)	0,85	45	0,51	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1350830	0,035" (0,89)	0,85	80	0,51	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1351230	0,035" (0,89)	0,85	120	0,51	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1351530	0,035" (0,89)	0,85	150	0,51	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1351830	0,035" (0,89)	0,85	180	0,51	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1352630	0,035" (0,89)	0,85	260	0,51	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1353030	0,035" (0,89)	0,85	300	0,51	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1354030	0,035" (0,89)	0,85	400	0,51	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J3351530	0,035" (0,89)	0,85	150	0,68	6	6	—	30	R3мм J	Очень жесткий
10J3351830	0,035" (0,89)	0,85	180	0,68	6	6	—	30	R3мм J	Очень жесткий
10J3352630	0,035" (0,89)	0,85	260	0,68	6	6	—	30	R3мм J	Очень жесткий
10J1381230	0,038" (0,97)	0,93	120	0,51	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1381530	0,038" (0,97)	0,93	150	0,51	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1381830	0,038" (0,97)	0,93	180	0,51	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1382630	0,038" (0,97)	0,93	260	0,51	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1383030	0,038" (0,97)	0,93	300	0,51	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J1384030	0,038" (0,97)	0,93	400	0,51	6	6	—	30	R3мм J	Стандартный
10J2380430	0,038" (0,97)	0,93	45	0,58	6	6	—	30	R3мм J	Жесткий

REF	Номинальный диаметр проводника, дюйм (мм) (согласно маркировке)	Внешний диаметр проводника D1, мм ($\pm 0,05$ мм)	Общая длина проводника L1, см ($\pm 5\%$)	Диаметр ядра D2, мм ($\pm ,05$ мм)	Диаметр изгиба D3, мм (± 1 мм)	Длина кончика L2, мм (± 1 мм)	Угол изгиба, ° ($\pm 5^\circ$)	Длина гибкого кончика, мм ($\pm 5\%$)	Форма кончика	Тип шфта
10J2380830	0,038" (0,97)	0,93	80	0,58	6	6	—	30	R3мм J	Жесткий
10J3381530	0,038" (0,97)	0,93	150	0,68	6	6	—	30	R3мм J	Очень жесткий
10J3381830	0,038" (0,97)	0,93	180	0,68	6	6	—	30	R3мм J	Очень жесткий
10J3382630	0,038" (0,97)	0,93	260	0,68	6	6	—	30	R3мм J	Очень жесткий
10J12515	0,025" (0,64)	0,60	150	0,38	8	8	—	30	R4мм J	Стандартный
10J12518	0,025" (0,64)	0,60	180	0,38	8	8	—	30	R4мм J	Стандартный
10J12526	0,025" (0,64)	0,60	260	0,38	8	8	—	30	R4мм J	Стандартный
10J13215	0,032" (0,81)	0,77	150	0,49	8	8	—	30	R4мм J	Стандартный
10J13218	0,032" (0,81)	0,77	180	0,49	8	8	—	30	R4мм J	Стандартный
10J13226	0,032" (0,81)	0,77	260	0,49	8	8	—	30	R4мм J	Стандартный
10J13515	0,035" (0,89)	0,85	150	0,51	8	8	—	30	R4мм J	Стандартный
10J13518	0,035" (0,89)	0,85	180	0,51	8	8	—	30	R4мм J	Стандартный
10J13526	0,035" (0,89)	0,85	260	0,51	8	8	—	30	R4мм J	Стандартный
10J23515	0,035" (0,89)	0,85	150	0,58	8	8	—	30	R4мм J	Жесткий
10J23518	0,035" (0,89)	0,85	180	0,58	8	8	—	30	R4мм J	Жесткий
10J23526	0,035" (0,89)	0,85	260	0,58	8	8	—	30	R4мм J	Жесткий
10J33515	0,035" (0,89)	0,85	150	0,68	8	8	—	30	R4мм J	Очень жесткий
10J33518	0,035" (0,89)	0,85	180	0,68	8	8	—	30	R4мм J	Очень жесткий
10J33526	0,035" (0,89)	0,85	260	0,68	8	8	—	30	R4мм J	Очень жесткий
10J33530	0,035" (0,89)	0,85	300	0,68	8	8	—	30	R4мм J	Очень жесткий
10J13815	0,038" (0,97)	0,93	150	0,51	8	8	—	30	R4мм J	Стандартный
10J13818	0,038" (0,97)	0,93	180	0,51	8	8	—	30	R4мм J	Стандартный
10J13826	0,038" (0,97)	0,93	260	0,51	8	8	—	30	R4мм J	Стандартный
10J23815	0,038" (0,97)	0,93	150	0,58	8	8	—	30	R4мм J	Жесткий
10J23818	0,038" (0,97)	0,93	180	0,58	8	8	—	30	R4мм J	Жесткий

REF	Номинальный диаметр проводника, дюйм (мм) (согласно маркировке)	Внешний диаметр проводника D1, мм ($\pm 0,05$ мм)	Общая длина проводника L1, см ($\pm 5\%$)	Диаметр ядра D2, мм ($\pm 0,05$ мм)	Диаметр изгиба D3, мм (± 1 мм)	Длина кончика L2, мм (± 1 мм)	Угол изгиба, ° ($\pm 5^\circ$)	Длина гибкого кончика, мм ($\pm 5\%$)	Форма кончика	Тип shaft
10J23826	0,038" (0,97)	0,93	260	0,58	8	8	—	30	R4мм J	Жесткий
10J33815	0,038" (0,97)	0,93	150	0,68	8	8	—	30	R4мм J	Очень жесткий
10J33818	0,038" (0,97)	0,93	180	0,68	8	8	—	30	R4мм J	Очень жесткий
10J33826	0,038" (0,97)	0,93	260	0,68	8	8	—	30	R4мм J	Очень жесткий
10J33830	0,038" (0,97)	0,93	300	0,68	8	8	—	30	R4мм J	Очень жесткий
10J1351560	0,035" (0,89)	0,85	150	0,51	12	12	—	30	R6мм J	Стандартный
10J1351860	0,035" (0,89)	0,85	180	0,51	12	12	—	30	R6мм J	Стандартный
10J2381560	0,038" (0,97)	0,93	150	0,58	12	12	—	30	R6мм J	Жесткий
10J2381860	0,038" (0,97)	0,93	180	0,58	12	12	—	30	R6мм J	Жесткий
10J3381560	0,038" (0,97)	0,93	150	0,68	12	12	—	30	R6мм J	Очень жесткий
10J3381860	0,038" (0,97)	0,93	180	0,68	12	12	—	30	R6мм J	Очень жесткий
10B1351550	0,035" (0,89)	0,85	150	0,51	—	—	—	50	B изгиб	Стандартный
10B1351850	0,035" (0,89)	0,85	180	0,51	—	—	—	50	B изгиб	Стандартный
10B1352650	0,035" (0,89)	0,85	260	0,51	—	—	—	50	B изгиб	Стандартный
10B1351580	0,035" (0,89)	0,85	150	0,51	—	—	—	80	B изгиб	Стандартный
10B1351880	0,035" (0,89)	0,85	180	0,51	—	—	—	80	B изгиб	Стандартный
10B1352680	0,035" (0,89)	0,85	260	0,51	—	—	—	80	B изгиб	Стандартный
10C13515	0,035" (0,89)	0,85	150	0,51	—	—	—	15	C изгиб	Стандартный
10C13518	0,035" (0,89)	0,85	180	0,51	—	—	—	15	C изгиб	Стандартный
10C13526	0,035" (0,89)	0,85	260	0,51	—	—	—	15	C изгиб	Стандартный

Максимальное усилие на разрыв: ≥ 5 Н - для моделей с $D1 \leq 0,75$ мм;
 ≥ 10 Н – для моделей с $D1 > 0,75$ мм.

Комплект поставки изделия

- Проводник гидрофильный APTMedical одного варианта исполнения – 5 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

8. Маркировка и упаковка

Каждое изделие помещено в защитный пластиковый обод для дополнительной защиты от внешних воздействий в процессе транспортирования и хранения, который должен быть снят перед применением, затем герметично упаковано в пакет для финишной стерилизации (индивидуальная упаковка). Далее вместе с инструкцией по применению - в коробку из плотного картона. Количество изделий в потребительской упаковке: 5 шт. Изделие стерильное. Категорически запрещено применение в случае нарушения упаковки.

Упаковка соответствует ISO 11607.

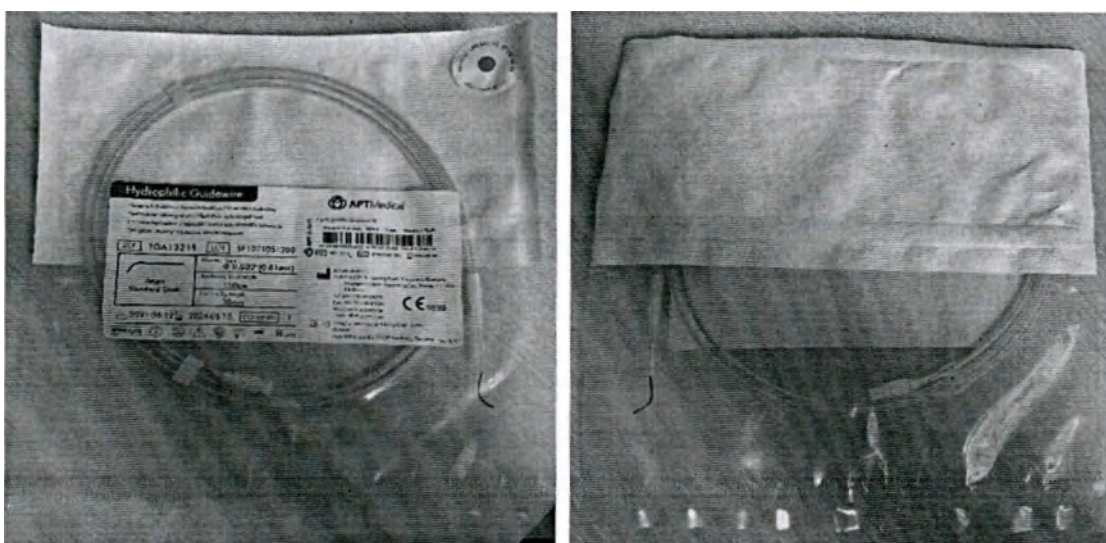


Рисунок 8. Внешний вид индивидуальной упаковки

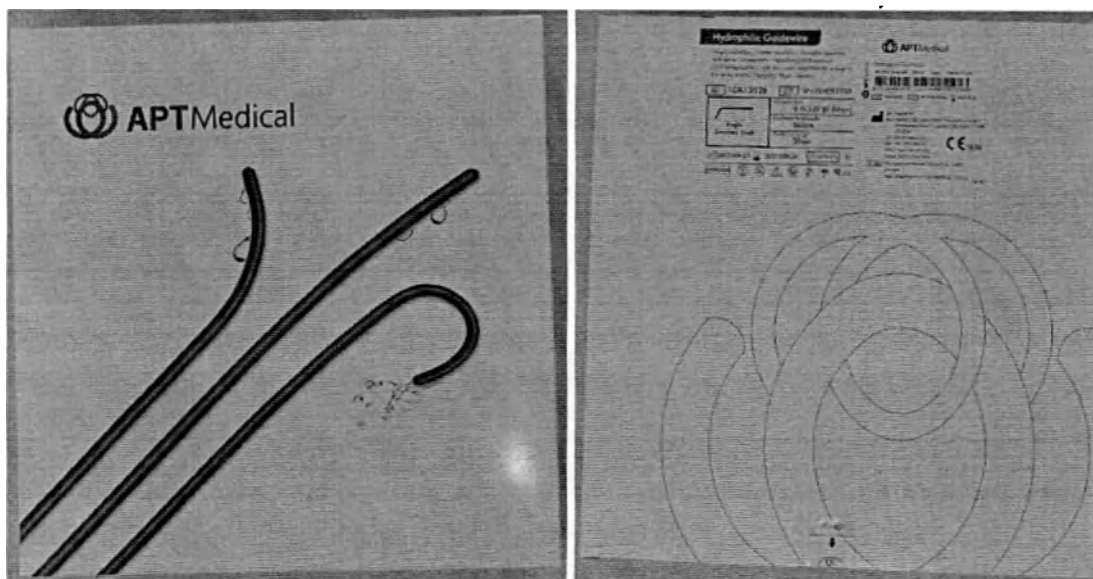


Рисунок 9. Внешний вид потребительской упаковки

Маркировка индивидуальной и потребительской упаковки изделия содержит следующую информацию:

-Наименование изделия,	Проводник гидрофильный APTMedical
-Информация о производителе,	
-Номер по каталогу (REF),	REF
-Код партии (LOT),	LOT
-Дата изготовления,	
-Дата истечения срока годности,	
-Символ «Запрет на повторное применение»,	
-Символ «Не стерилизовать повторно»,	
-Символ «Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению»,	
-Символ «Беречь от влаги»,	
-Символ «Не допускать воздействия солнечного света»,	
-Символ «Не использовать при повреждении упаковки»,	
-Символ «Апирогенно»,	
-Символ «Уполномоченный представитель в Европейском сообществе»,	EC REP
-Количество изделий в упаковке,	CONTENTS
-Символ «Стерилизация оксидом этилена»,	STERILIZED
-Маркировка CE,	CE 1639
-Штрихкод,	
-Символ «Продажа данного изделия разрешена только врачам или по их предписанию»,	Rx only
-Информация об уполномоченном представителе производителя на территории РФ,	
-Регистрационное удостоверение № от,	
-Схема изделия, форма кончика, тип шфта и основные габаритные размеры	

Также на индивидуальную упаковку нанесён стикер с индикацией стерильности.



Рисунок 10. Внешний вид стикера с индикацией стерильности на индивидуальной упаковке

Для транспортировки изделия упаковываются в транспортную упаковку из гофрированного картона.

9. Соответствие стандартам Российской Федерации

ГОСТ Р ИСО 11070-2010: Интродьюсеры однократного применения стерильные. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ ISO 10993-1-2021: Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 1: Оценка и исследования в процессе менеджмента риска.

ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий: Ч. 2. Требования к обращению с животными.

ГОСТ ISO 10993-4-2020: Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 4: Исследования изделий, взаимодействующих с кровью

ГОСТ ISO 10993-5-2011: Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 5: Исследования на цитотоксичность: методы *in vitro*

ГОСТ ISO 10993-7-2016: Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 7: Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации.

ГОСТ ISO 10993-10-2011: Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 10: Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.

ГОСТ ISO 10993-11-2021: Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий - Часть 11: Исследования общетоксического действия.

ГОСТ ISO 10993-12-2015 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий: Ч.12. Приготовление проб и контрольные образцы.

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020: Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации - Часть 1: Основные требования.

ГОСТ ISO 11607-1-2018: Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации - Часть 1: Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам.

ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

ГОСТ 31209-2003 Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний, п.5.3.1, п.5.3.2, п.5.3.3, п.5.4.4.

ГОСТ 31214-2016 Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность.

ГОСТ Р 55227-2012 Вода. Методы определения содержания формальдегида. Определение массовой концентрации формальдегида методом высокочувствительной жидкостной хроматографии, п. 6 (метод Б).

ГОСТ Р 57162-2016 Вода. Определение содержания элементов методом атомно-абсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией.
ГФ XIV том 1 ОФС.1.2.4.0005.15 Пирогенность.

10. Транспортирование, хранение и эксплуатация

Условия транспортирования: изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта в соответствии с условиями: температура воздуха от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности от 35 % до 65 % (неконденсирующаяся) и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа.

Условия хранения: температура воздуха от $+2^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности от 20 % до 70 % (неконденсирующаяся) и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа. Хранить изделие в упаковке предприятия-изготовителя в сухом, чистом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, при контролируемой температуре. Срок хранения указан на маркировке каждого изделия.

Условия эксплуатации: Изделие следует использовать при температуре от $+32^{\circ}\text{C}$ до $+42^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности до 100 %.

11. Сведения о стерильности изделия

Изделие поставляется стерильным. Стерилизовано оксидом этилена по ГОСТ ISO 11135-2017 (уровень обеспечения стерильности 10^{-6}).

Повторная стерилизация изделия запрещена. Повторное применение запрещено.

12. Сведения об утилизации

Утилизацию изделия проводить в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы). После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО). Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

При неиспользовании изделия, повреждении индивидуальной упаковки и истечении срока хранения утилизацию проводить в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А.

13. Гарантии

Компания APT Medical Inc. («АПТ Медикал Инк.»), Китай не несет ответственности в случае повторного использования изделия, его повторной обработки или повторной стерилизации, и не дает никаких гарантий, ясно изложенных или подразумеваемых, включая, среди прочего, товарную пригодность и пригодность для использования по назначению, в отношении такого изделия.

Срок сохранения стерильности – 36 месяцев, срок годности – 36 месяцев.

Производитель:

APT Medical Inc. («АПТ Медикал Инк.»), Китай

No. 009 Xiangxiang Road, Xiangxiang Economic Development Zone, Xiangxiang City, Hunan Province, P.R. China

Телефон: +86-731-56841398

Факс: +86-731-56841080

E-mail: ra_hn@aptmed.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи»

ООО «Компания «БиВи»

129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17.

Тел: +7 (499) 281-67-68

info@beawire.com

ИНН 7722385440

Перевод с английского и китайского языков на русский язык

СЕРТИФИКАТ

/Логотип/

Китайский Совет по содействию международной торговле

Торгово-промышленная палата Китая

*[На бланке Китайского Совета по содействию международной торговле]
[Логотип Китайского Совета по содействию международной торговле]*

01508583

**Китайский Совет по содействию международной торговле
Торгово-промышленная палата Китая**

СЕРТИФИКАТ

QR-код
№ 233700B2/004585

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО: печать компании «АПТ МЕДИКАЛ ИНК.»
(APT MEDICAL INC.) на прилагаемом ДОКУМЕНТЕ является подлинной.

Китайский Совет по содействию международной торговле

Подпись уполномоченного лица: /Подпись/

Вэй Шаньшань

Дата: 19 октября 2023 г.

**Тисненая печать: [Китайский Совет по
содействию международной торговле //
СЕРТИФИКАЦИЯ]**

**Печать: [Китайский Совет по содействию
международной торговле // СЕРТИФИКАЦИЯ]**

Веб-сайт для проверки подлинности сертификата: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

УТВЕРЖДАЮ


/подпись/

Чженхуэй Чэн

28.09.2023 г.

Печать: [«АПТ МЕДИКАЛ ИНК.» 4303000105674]

Печать: [Китайский Совет по содействию международной торговле // СЕРТИФИКАЦИЯ]

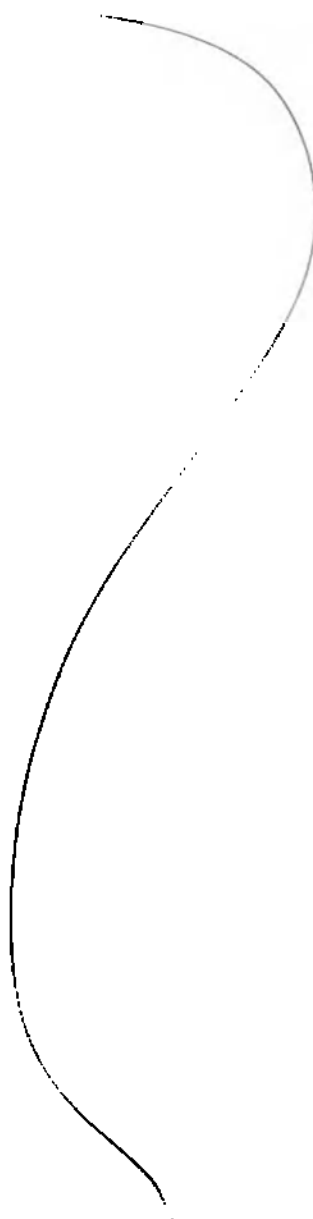

Перевод данного текста выполнен переводчиком Юдиным Юрием Константиновичем

Российская Федерация

Город Москва.

Первого ноября две тысячи двадцать третьего года.

Я, Прокошенкова Елена Евгеньевна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Юдина Юрия Константиновича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2023- 36-84

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

Е.Е. Прокошенкова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 26 лист (-а, -ов).

Е.Е. Прокошенкова