

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会暨中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade is China Chamber of International Commerce

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

01294376

中国国际贸易促进委员会



China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



223305B0/001503

号码 No.

兹证明：在所附文件上的浙江普特医疗器械有限公司的印章属实。



THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of ZHEJIANG PROTECT
MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD on the annexed DOCUMENT is
genuine.



China Council for the Promotion
of International Trade

授权签字:

Authorized
Signature:

Meng Mingli


日期: 2022年07月21日

(Date: Jul. 21, 2022)

证明书查询网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

APPROVED BY

General manager Zhejiang Protect
Medical Equipment Co., Ltd.

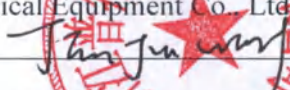

« » 2022



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Система ортодонтическая регулируемая

(Zhejiang Protect Medical Equipment Co., Ltd («Чжецзян Протект Медикал Экуипмент Ко. Лтд»),
Китай.)

2022

Настоящий документ подготовлен для предоставления сведений в целях регистрации медицинского изделия на территории Российской Федерации. Сведения представлены в объеме, требуемом в соответствии с Правилами регистрации медицинских изделий (постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416).

Наименование изделия: «Система ортодонтическая регулируемая».

Производитель: Zhejiang Protect Medical Equipment Co., Ltd («Чжецзян Протект Медикал Экуипмент Ко. Лтд»), Китай. Science & Technology Zone, Xiaofeng Town 313301, Anji City, Zhejiang, China

Место производства:

Zhejiang Protect Medical Equipment Co., Ltd, («Чжецзян Протект Медикал Экуипмент Ко. Лтд»), Китай. Science & Technology Zone, Xiaofeng Town 313301, Anji City, Zhejiang, China

Изделие производится в соответствии со стандартами EN ISO 13485:2016 и имеет маркировку CE.

Вид контакта с организмом: постоянный контакт со слизистыми оболочками.

Условия применения: лечебные и лечебно-профилактические медицинские учреждения.

1. Назначение:

Изделие предназначено для установки на зубы с целью их выпрямления.

Функциональное назначение:

Ортодонтические брекет-системы помещаются на зубы и периодически корректируются, что приводит к необходимым скелетным и/или зубным перестроениям, посредством изменения и уменьшения нейромускульных усилий челюстно-лицевой системы. Обычно используется для коррекции нарушений прикуса, таких как прогения, прогнатия, латеральный прикус, или кривых зубов и других косметических или конструктивных дефектов зубов или челюстей. Изделие предназначено для использования одним пациентом в течение короткого времени (одноразового использования) перед тем, как будет выброшено.

2. Особые свойства изделия:

Керамические брекет-системы изготавливаются из алюминия с использованием метода высокотемпературного спекания с последующей обработкой. Они приклеиваются к поверхности коронки зуба и связывают брекет-систему дугой. Брекет-система подает корректирующее усилие на брекет-систему, заставляя зубы смещаться и разворачиваться в соответствии с предписаниями.


Металлические брекет-системы изготавливаются из нержавеющей стали. Они приклеиваются к поверхности коронки зуба и связывают брекет-систему дугой. Брекет-система подает корректирующее усилие на брекет-систему, заставляя зубы смещаться и разворачиваться в соответствии с предписаниями.


Ортодонтические принадлежности, выполненные из нержавеющей стали, нитинола или полиуретана, используются доктором при выравнивании зубов пациента.

3. Техническая спецификация:

4. Таблица 1. Описание и изображение изделия


№	Наименование	Описание	Изображение
1	Брекеты ортодонтические металлические	Изделие приклеивается к поверхности коронки зуба, связывается ортодонтической проволокой, тем самым подает корректирующее усилие на брекет-систему, заставляя зубы смещаться и разворачиваться в соответствии с предписаниями. Изделие изготавливается из нержавеющей стали.	
2	Брекеты ортодонтические керамические	Изделие приклеивается к поверхности коронки зуба, связывается ортодонтической проволокой, тем самым подает корректирующее усилие на брекет-систему, заставляя зубы смещаться и разворачиваться в соответствии с предписаниями. Изделие изготавливается из алюминия с использованием метода высокотемпературного спекания с последующей обработкой.	
3	Кольца бандажные	Изделие приклеивается к поверхности коронки зуба, связывает брекеты и подает корректирующее усилие на брекет-систему, заставляя зубы смещаться и разворачиваться в соответствии с предписаниями.	
4	Трубки щечные	Изделие приклеивается к поверхности коронки зуба, связывает брекеты ортодонтической проволокой, подает корректирующее усилие на брекет-систему, заставляя зубы смещаться и разворачиваться в соответствии с предписаниями. Изделие используется совместно с брекетами.	

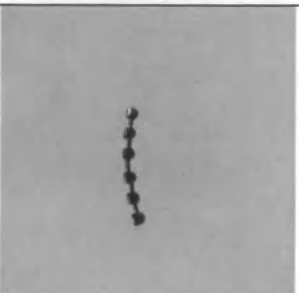5	Пружины	Изделие крепится на брекет и создает силу, заставляющую зубы смещаться и разворачиваться в соответствии с предписаниями.	
6	Стопор	Изделие устанавливается на дугах для того, чтобы предотвращать движение дуг для достижения ортодонтического лечения.	
7	Крючок для установки в самолигирующий металлический брекет РТ-5	Изделие устанавливается в брекет и подает корректирующее усилие на брекет-систему, заставляя зубы смещаться и разворачиваться в соответствии с предписаниями.	
8	Брекет накусочный	Изделие предназначено для разобщения прикуса с целью ускорения коррекции глубокого резцового перекрытия. Изделие устанавливается на верхние центральные резцы.	
9	Ретейнеры	Изделие сохраняет зубы в новом положении на альвеолярной кости для достижения ортодонтического лечения.	

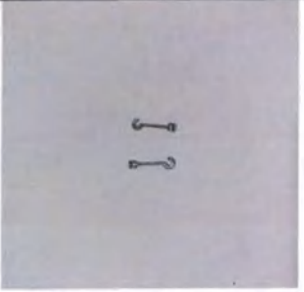
10	Лигатура эластичная	Изделие фиксирует брекеты и дуги для достижения ортодонтического лечения.	
11	Лигатура металлическая	Изделие фиксирует брекеты и дуги для достижения ортодонтического лечения.	
12	Сепарационные кольца на модуле	Изделие устанавливается для создания промежутков между зубами с целью установки на них ортодонтических колец.	
13	Цепочки эластичные	Изделие устанавливается на брекет и создает поперечную тягу, благодаря возможности корректирования ее длины, что заставляет зубы смещаться и разворачиваться в соответствии с предписаниями.	
14	Крючок силовой	Изделие крепится на дуги и используется для подвешивания эластичных тяг для достижения ортодонтического лечения.	

15	Крючок обжимной	Изделие крепится на дуги и используется для подвешивания эластичных тяг для достижения ортодонтического лечения.	
16	Кнопки лингвальные	Изделие фиксируется на внутренней стороне зубов и подает корректирующее усилие на брекет-систему, заставляя зубы смещаться и разворачиваться в соответствии с предписаниями.	
17	Замок лингвальный	Изделие крепится на кольцо для моляра, помогая достигать ортодонтического лечения.	
18	Дуги	Изделие крепится на брекетах, создавая стягивание, заставляя зубы смещаться и разворачиваться в соответствии с предписаниями.	
19	Тяги эластичные	Изделие устанавливается на брекет и используется для фиксации дуг, что помогает зубам смещаться и разворачиваться в соответствии с предписаниями.	
20	Маска лицевая	Изделие используется с целью исправления отдельных дефектов зубочелюстного аппарата, в частности для решения проблемы мезиальной окклюзии.	


Технические характеристики медицинского изделия: «Система ортодонтическая регулируемая»:
Характеристики лигатуры (допустимые неуказанные отклонения $\pm 10\%$)

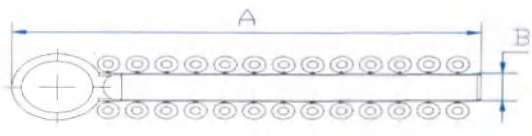Наименование	Размер А/мм	Размер В/мм	Масса/г	Рисунок
Лигатура эластичная	$64 \pm 0,2$	$5,3 \pm 0,2$	$1,5 \pm 0,2$	


При растяжении лигатур на $4 \text{ мм} \pm 0,5 \text{ мм}$ эластичность составляет не менее 1,6 Н.

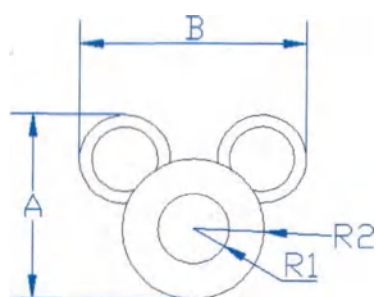

Лигатура эластичная на модуле Mickey

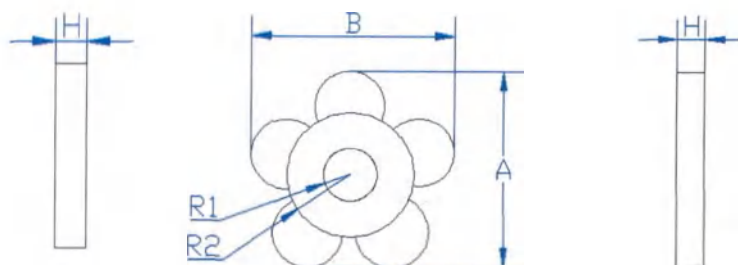


Лигатура эластичная на модуле Flower

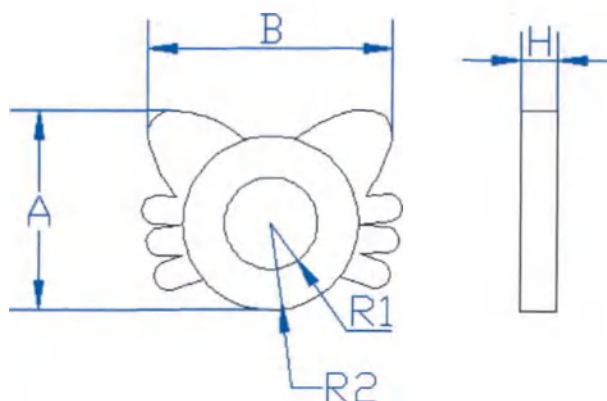


Лигатура эластичная на модуле Kitty Cat

Лигатура	А/мм	В/мм	Р1/мм	Р2/мм	Н/мм	Масса/г
Mickey	4.1 ± 0.04	5 ± 0.04	0.75 ± 0.04	1.55 ± 0.04	0.7 ± 0.04	0,008
Flower	5.1 ± 0.04	5.2 ± 0.04	0.65 ± 0.04	1.6 ± 0.04	0.7 ± 0.04	0,009
Kitty Cat	3.5 ± 0.04	4.2 ± 0.04	0.8 ± 0.04	1.5 ± 0.04	0.6 ± 0.04	0,004

Характеристики лигатуры металлической (допустимые неуказанные отклонения $\pm 10\%$)

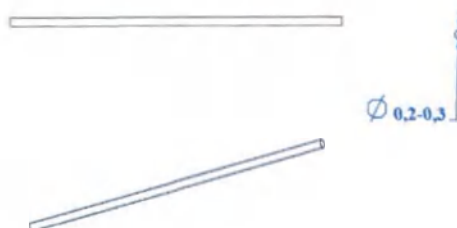

Характеристики цепочки эластичной (допустимые неуказанные отклонения $\pm 10\%$)

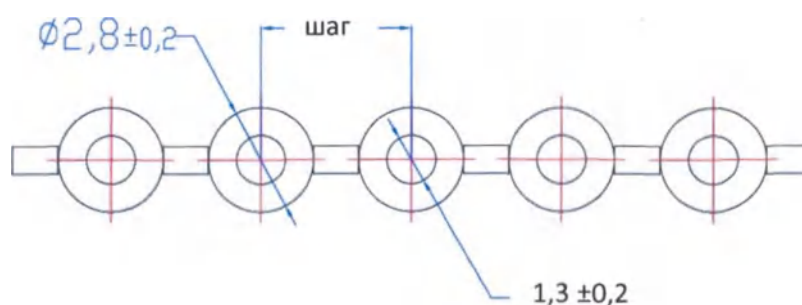

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Шаг (короткий, средний, длинный шаг), мм
1,3 $\pm$ 0,2	2,8 $\pm$ 0,2	3 $\pm$ 0,2; 3,5 $\pm$ 0,2; 4 $\pm$ 0,2

Характеристики сепарационных колец (допустимые неуказанные отклонения $\pm 10\%$)


Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Толщина, мм
1,5 $\pm$ 0,2	4,0 $\pm$ 0,2	1,2 $\pm$ 0,2

Характеристики металлических брекетов (допустимые неуказанные отклонения $\pm 10\%$)

Средняя шероховатость поверхности (R_a) ортодонтических металлических брекетов не превышает 0,5 мкм.

Твердость поверхности по Виккерсу составляет 250-330 Hv при нагрузке $F=9,8$ Н время удержания $T=10$ с.

Эмалевые адгезивы, применяемые для крепления металлических брекетов к поверхности эмали (если это требуется), должны обеспечивать удерживающее усилие не менее 30 Н.

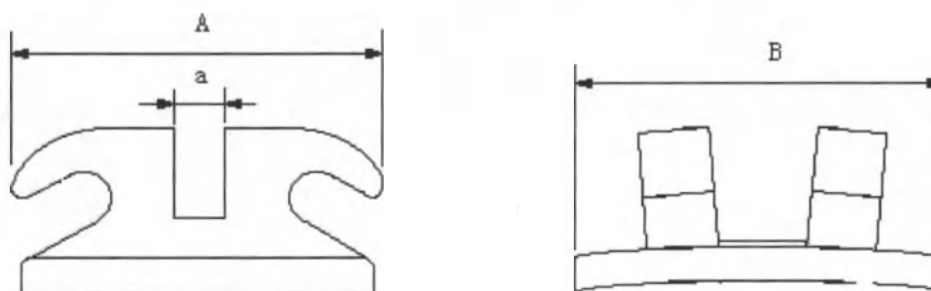

Размеры брекетов самолигирующих:

Зуб	A (ширина профиля), мм	B (ширина основания), мм	a, мм
1┐1	3,0±0,1	3,6±0,3	0,47-0,62
2┐2	3,0±0,1	3,6±0,3	
3┐3	3,0±0,1	3,6±0,3	
4┐4	3,0±0,1	3,6±0,3	
5┐5	3,0±0,1	3,6±0,3	
1┐1	3,0±0,1	3,6±0,3	
2┐2	3,0±0,1	3,6±0,3	
3┐3	3,0±0,1	3,6±0,3	
4┐4	3,0±0,1	3,6±0,3	
5┐5	3,0±0,1	3,6±0,3	

Размеры брекетов самолигирующих:

Набор лигатурных металлических брекетов .022 MIM Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
A (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,4	3,2	3,2
B (ширина основания), мм	4,2	3,6	4,0	4,3	4,2
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
A (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,3	3,3	3,2
B (ширина основания), мм	3,3	3,3	3,8	4,3	4,3
a, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .018 MIM Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
A (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,4	3,2	3,2
B (ширина основания), мм	4,2	3,6	4,0	4,3	4,2
a, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
A (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,3	3,3	3,2
B (ширина основания), мм	3,3	3,3	3,8	4,3	4,3
a, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .022 MIM MBT					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
A (ширина профиля), мм	3,7	3,4	3,4	3,4	3,5
B (ширина основания), мм	4,0	3,3	3,8	3,8	3,8
a, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
A (ширина профиля), мм	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
B (ширина основания), мм	3,0	3,0	4,0	3,5	3,8
a, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .018 MIM MBT					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
A (ширина профиля), мм	3,7	3,4	3,4	3,4	3,5
B (ширина основания), мм	4,0	3,3	3,8	3,8	3,8
a, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
A (ширина профиля), мм	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
B (ширина основания), мм	3,0	3,0	4,0	3,5	3,8
a, мм	0,47-0,62				



Набор лигатурных металлических брекетов .022 MIM Mini Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0
В (ширина основания), мм	3,9	3,3	3,5	3,6	3,6
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
В (ширина основания), мм	2,8	2,8	3,5	3,7	3,7
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .018 MIM Mini Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0
В (ширина основания), мм	3,9	3,3	3,5	3,6	3,6
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
В (ширина основания), мм	2,8	2,8	3,5	3,7	3,7
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .022 MIM Mini MBT					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
В (ширина основания), мм	3,7	3,3	3,6	3,6	3,6
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,1	3,1	3,2
В (ширина основания), мм	2,8	2,8	3,5	3,6	3,6

а, мм	0,47-0,62
-------	-----------

Набор лигатурных металлических брекетов .018 MIM Mini MBT					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
В (ширина основания), мм	3,7	3,3	3,6	3,6	3,6
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,1	3,1	3,2
В (ширина основания), мм	2,8	2,8	3,5	3,6	3,6
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .022 Super Standart Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2
В (ширина основания), мм	4,2	3,6	4,0	4,3	4,2
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,3	3,3	3,2
В (ширина основания), мм	3,2	3,3	3,8	4,3	4,3
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .018 Super Standart Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2
В (ширина основания), мм	4,2	3,6	4,0	4,3	4,2
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5

А (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,3	3,3	3,2
В (ширина основания), мм	3,2	3,3	3,8	4,3	4,3
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .022 Super Standart MBT					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,7	3,4	3,4	3,5	3,5
В (ширина основания), мм	4,0	3,4	3,9	3,9	3,9
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
В (ширина основания), мм	3,0	3,0	4,0	3,5	3,8
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .018 Super Standart MBT					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,7	3,4	3,4	3,5	3,5
В (ширина основания), мм	4,0	3,4	3,9	3,9	3,9
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
В (ширина основания), мм	3,0	3,0	4,0	3,5	3,8
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .022 Super Mini Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0
В (ширина основания), мм	3,9	3,3	3,5	3,7	3,6
а, мм	0,47-0,62				

Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	3,1	3,0	3,0	3,1
В (ширина основания), мм	2,8	2,8	3,5	3,7	3,7
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .018 Super Mini Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0
В (ширина основания), мм	3,9	3,3	3,5	3,7	3,6
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	3,1	3,0	3,0	3,1
В (ширина основания), мм	2,8	2,8	3,5	3,7	3,7
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .022 Super Mini MBT					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0
В (ширина основания), мм	3,9	3,3	3,5	3,7	3,6
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	3,1	3,0	3,0	3,1
В (ширина основания), мм	2,8	2,8	3,5	3,7	3,7
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .018 Super Mini MBT					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0
В (ширина основания), мм	3,9	3,3	3,5	3,7	3,6

а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	3,1	3,0	3,0	3,1
В (ширина основания), мм	2,8	2,8	3,5	3,7	3,7
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .022 Accuracy Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,4	3,2	3,2
В (ширина основания), мм	4,2	3,7	4,0	4,3	4,3
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,3	3,3	3,2
В (ширина основания), мм	3,2	3,3	3,8	4,3	4,3
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .018 Accuracy Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,4	3,2	3,2
В (ширина основания), мм	4,2	3,7	4,0	4,3	4,3
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,3	3,3	3,2
В (ширина основания), мм	3,2	3,3	3,8	4,3	4,3
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .022 Accuracy MBT					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,6	3,4	3,4	3,5	3,5

В (ширина основания), мм	4,0	3,5	3,9	3,9	3,9
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
В (ширина основания), мм	3,0	3,0	4,0	3,5	3,8
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .018 Accuracy MBT					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,6	3,4	3,4	3,5	3,5
В (ширина основания), мм	4,0	3,5	3,9	3,9	3,9
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
В (ширина основания), мм	3,0	3,0	4,0	3,5	3,8
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .022 Accuracy Mini Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,2	3,4	3,3
В (ширина основания), мм	3,9	3,4	3,6	3,5	3,5
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,3	3,3	3,3	3,3	3,6
В (ширина основания), мм	2,8	2,8	3,6	3,5	3,5
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .018 Accuracy Mini Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5

А (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,2	3,4	3,3
В (ширина основания), мм	3,9	3,4	3,6	3,5	3,5
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,3	3,3	3,3	3,3	3,6
В (ширина основания), мм	2,8	2,8	3,6	3,5	3,5
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .022 Accuracy Mini MBT					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,2	3,1	3,0	3,3	3,2
В (ширина основания), мм	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,3	3,2	3,2	3,3	3,2
В (ширина основания), мм	3,9	3,6	3,6	3,5	3,6
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .018 Accuracy Mini MBT					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,2	3,1	3,0	3,3	3,2
В (ширина основания), мм	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,3	3,2	3,2	3,3	3,2
В (ширина основания), мм	3,9	3,6	3,6	3,5	3,6
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .018 Super Bio Roth

Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
В (ширина основания), мм	4,0	3,3	3,5	3,7	3,6
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	3,1	3,0	3,0	3,1
В (ширина основания), мм	2,7	2,7	3,5	3,8	3,6
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .022 Super Bio Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
В (ширина основания), мм	4,0	3,3	3,5	3,7	3,6
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	3,1	3,0	3,0	3,1
В (ширина основания), мм	2,7	2,7	2,5	3,8	3,6
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .018 Super Bio MBT					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0
В (ширина основания), мм	3,9	3,4	3,4	3,7	3,6
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	3,1	3,0	3,0	3,1
В (ширина основания), мм	2,8	2,8	3,5	3,7	3,6
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .022 Super Bio MBT					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0
В (ширина основания), мм	3,9	3,4	3,4	3,7	3,6
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	3,1	3,0	3,0	3,1
В (ширина основания), мм	2,8	2,8	3,5	3,7	3,6
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .022 Executive Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
В (ширина основания), мм	3,7	3,0	3,0	3,5	3,5
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3
В (ширина основания), мм	3,0	3,0	3,2	3,3	3,3
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .018 Executive Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
В (ширина основания), мм	3,7	3,0	3,0	3,5	3,5
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3
В (ширина основания), мм	3,0	3,0	3,2	3,3	3,3
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .022 Executive MBT					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
В (ширина основания), мм	3,7	3,0	3,0	3,4	3,5
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3
В (ширина основания), мм	3,0	3,0	3,2	3,3	3,3
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .018 Executive MBT					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
В (ширина основания), мм	3,7	3,0	3,0	3,4	3,5
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3
В (ширина основания), мм	3,0	3,0	3,2	3,3	3,3
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .022 PB Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2
В (ширина основания), мм	3,6	3,2	3,3	3,2	3,2
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4
В (ширина основания), мм	2,8	2,8	3,3	3,4	3,4

а, мм	0,47-0,62
-------	-----------

Набор лигатурных металлических брекетов .018 PB Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2
В (ширина основания), мм	3,6	3,2	3,3	3,2	3,2
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4
В (ширина основания), мм	2,8	2,8	3,3	3,4	3,4
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .022 PT Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	3,0	3,2	3,0	3,1
В (ширина основания), мм	3,3	2,9	3,2	3,3	3,1
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,0	3,0	3,1	3,0	3,0
В (ширина основания), мм	2,8	2,8	3,3	3,3	3,2
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .018 PT Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	3,0	3,2	3,0	3,1
В (ширина основания), мм	3,3	2,9	3,2	3,3	3,1
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,0	3,0	3,1	3,0	3,0

В (ширина основания), мм	2,8	2,8	3,3	3,3	3,2
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .018 вертикальных Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	2,9	3,3	2,9	3,0
В (ширина основания), мм	4,2	3,5	3,8	3,7	3,7
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,2	3,2	2,8	3,0	3,0
В (ширина основания), мм	3,2	3,2	3,9	3,7	3,7
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .022 Ricketts					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
В (ширина основания), мм	3,8	3,3	3,5	3,6	3,6
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1
В (ширина основания), мм	2,8	2,9	3,6	3,6	3,6
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .022 Alexander					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,1	3,0	3,0	2,9	3,0
В (ширина основания), мм	4,2	3,5	3,8	3,7	3,7
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5

А (ширина профиля), мм	2,9	2,9	3,1	3,1	3,1
В (ширина основания), мм	3,2	3,2	3,8	3,7	3,7
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов .022 2D лингвальных					
Зуб	1 $\perp$ 1	2 $\perp$ 2	3 $\perp$ 3	4 $\perp$ 4	5 $\perp$ 5
А (ширина профиля), мм	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
В (ширина основания), мм	3,0	3,0	3,0	3,7	3,7
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1 $\top$ 1	2 $\top$ 2	3 $\top$ 3	4 $\top$ 4	5 $\top$ 5
А (ширина профиля), мм	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
В (ширина основания), мм	3,0	3,0	3,0	3,7	3,7
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных металлических брекетов 3D с двойным слотом							
Зуб	1 $\perp$ 1	2 $\perp$ 2	3 $\perp$ 3	4 $\perp$ 4	5 $\perp$ 5	6 $\perp$ 6	7 $\perp$ 7
А (ширина профиля), мм	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
В (ширина основания), мм	3,2	3,2	3,2	4,0	4,0	4,0	6,5
а, мм	0,47-0,62						
Зуб	1 $\top$ 1	2 $\top$ 2	3 $\top$ 3	4 $\top$ 4	5 $\top$ 5	6 $\top$ 6	7 $\top$ 7
А (ширина профиля), мм	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
В (ширина основания), мм	3,2	3,2	3,3	4,0	4,0	4,0	6,5
а, мм	0,47-0,62						

Набор лигатурных металлических брекетов .022 3D лингвальных с горизонтальным слотом							
Зуб	1 $\perp$ 1	2 $\perp$ 2	3 $\perp$ 3	4 $\perp$ 4	5 $\perp$ 5	6 $\perp$ 6	7 $\perp$ 7
А (ширина профиля), мм	2,5	2,5	2,6	1,8	1,7	4,4	3,0
В (ширина основания), мм	3,0	2,9	2,9	3,1	3,2	1,6	5,8

а, мм	0,47-0,62						
Зуб	1Т1	2Т2	3Т3	4Т4	5Т5	6Т6	7Т7
А (ширина профиля), мм	2,3	2,6	2,4	1,7	1,7	2,9	1,6
В (ширина основания), мм	3,0	3,0	2,9	3,2	3,2	5,5	5,5
а, мм	0,47-0,62						

Набор лигатурных металлических брекетов .022 3D лингвальных вертикальным слотом								с
Зуб	1Т1	2Т2	3Т3	4Т4	5Т5	6Т6	7Т7	
А (ширина профиля), мм	2,9	2,9	2,8	2,6	2,6	1,6	3,0	
В (ширина основания), мм	3,2	3,2	3,2	4,6	4,6	4,4	5,8	
а, мм	0,47-0,62							
Зуб	1Т1	2Т2	3Т3	4Т4	5Т5	6Т6	7Т7	
А (ширина профиля), мм	2,8	2,9	2,9	2,7	2,6	1,7	3,5	
В (ширина основания), мм	3,2	3,3	3,3	4,6	4,6	3,2	6,0	
а, мм	0,47-0,62							

Размеры лигатурных брекетов

Характеристики керамических брекетов (допустимые неуказанные отклонения $\pm 10\%$)

Средняя шероховатость поверхности (Ra) керамических брекетов не превышает 0,5 мкм

Эмалевые адгезивы, применяемые для крепления металлических брекетов к поверхности эмали (если это требуется), должны обеспечивать удерживающее усилие не менее 30 Н.

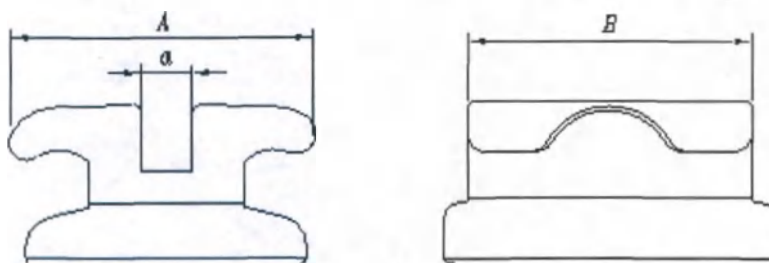


Рисунок. Схематическое изображение керамического брекета

Размеры лигатурных керамических брекетов:

Набор лигатурных керамических брекетов .022 Maia Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	4,0	3,6	3,7	3,7	3,7
В (ширина основания), мм	3,5	3,2	3,6	3,4	3,4
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,5	3,5	3,7	3,8	3,9
В (ширина основания), мм	2,8	2,8	3,6	3,5	3,5
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных керамических брекетов .018 Maia Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	4,0	3,6	3,7	3,7	3,7
В (ширина основания), мм	3,5	3,2	3,6	3,4	3,4
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,5	3,5	3,7	3,8	3,9
В (ширина основания), мм	2,8	2,8	3,6	3,5	3,5
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных керамических брекетов .022 Maia MBT					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	4,0	3,4	3,7	3,8	3,8
В (ширина основания), мм	3,6	3,1	3,8	3,7	3,7
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,9	4,0	3,5	3,8	3,8

В (ширина основания), мм	3,2	3,3	3,7	3,7	3,7
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных керамических брекетов .018 Maia MBT					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	4,0	3,3	3,7	3,8	3,8
В (ширина основания), мм	3,6	3,2	3,7	3,7	3,7
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,9	3,9	3,5	3,7	3,8
В (ширина основания), мм	3,2	3,3	3,7	3,8	3,7
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных керамических брекетов .022 Maia 2nd Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9
В (ширина основания), мм	4,1	3,8	4,0	3,8	3,9
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,8	3,8	4,0	4,1	4,2
В (ширина основания), мм	3,2	3,1	4,1	3,8	3,9
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных керамических брекетов .018 Maia 2nd Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9
В (ширина основания), мм	4,0	3,8	3,9	3,7	3,8
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5

А (ширина профиля), мм	3,8	3,8	4,0	4,1	4,2
В (ширина основания), мм	3,2	3,1	4,0	3,8	3,8
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных керамических брекетов .022 Maia 2nd MBT					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9
В (ширина основания), мм	4,0	3,8	4,0	3,8	3,8
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,9	3,8	4,0	4,1	4,2
В (ширина основания), мм	3,2	3,1	4,1	3,8	3,9
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных керамических брекетов .018 Maia 2nd MBT					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9
В (ширина основания), мм	4,0	3,8	4,0	3,8	3,8
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,9	3,8	4,0	4,1	4,2
В (ширина основания), мм	3,2	3,1	4,1	3,9	3,9
а, мм	0,47-0,62				

Размеры лигатурных сапфировых брекетов:

Набор лигатурных керамических брекетов .022 Sapphire Plus Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	4,0	3,8	3,8	3,8	3,8
В (ширина основания), мм	3,3	3,0	3,4	3,4	3,3

а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,8	3,8	3,8	3,8	3,7
В (ширина основания), мм	2,9	2,9	3,5	3,3	3,4
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных керамических брекетов .018 Sapphire Plus Roth					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	4,0	3,8	3,8	3,8	3,8
В (ширина основания), мм	3,0	3,0	3,4	3,3	3,3
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,8	3,8	3,8	3,8	3,7
В (ширина основания), мм	2,9	2,9	3,5	3,3	3,4
а, мм	0,47-0,62				

Набор лигатурных керамических брекетов .022 Sapphire Plus MBT					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	4,0	4,0	4,0	3,9	4,0
В (ширина основания), мм	3,1	3,0	3,2	3,1	3,2
а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	3,9	4,0	4,0	3,8	3,9
В (ширина основания), мм	2,9	2,9	3,1	3,0	3,0
а, мм	0,47-0,62				
Набор лигатурных керамических брекетов .018 Sapphire Plus MBT					
Зуб	1┐1	2┐2	3┐3	4┐4	5┐5
А (ширина профиля), мм	4,0	3,8	4,0	3,9	3,8
В (ширина основания), мм	3,1	3,4	3,4	3,1	3,3

а, мм	0,47-0,62				
Зуб	1Т1	2Т2	3Т3	4Т4	5Т5
А (ширина профиля), мм	3,9	3,8	4,1	4,0	4,1
В (ширина основания), мм	2,9	2,9	3,4	3,3	2,9
а, мм	0,47-0,62				

Характеристики колец бандажных (допустимые неуказанные отклонения $\pm 10\%$)

Средняя шероховатость поверхности (R_a) колец не превышает 0,4 мкм.

Твердость поверхности по Виккерсу составляет 250-330 Hv при нагрузке $F=9,8$ Н время удержания $T=10$ с.

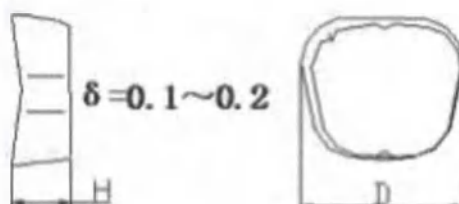



Рисунок. Схематическое изображение колец бандажных

Размеры колец:

Высота (мм)	Ширина (мм)
3,5 ~ 5,6	9,0 ~ 13,5

δ — толщина колец, мм.

Характеристики Сепарационных колец на модуле (допустимые неуказанные отклонения $\pm 10\%$)

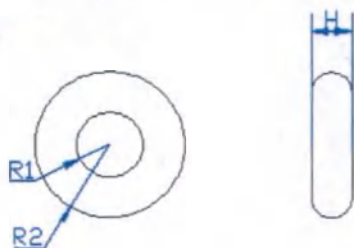

R1, мм	R2, мм	H, мм	Масса, г
0,8 $\pm$ 0.5	2.0 $\pm$ 0.5	1.2 $\pm$ 0.5	0,015

Характеристики трубок щечных (допустимые неуказанные отклонения $\pm 10\%$)

Средняя шероховатость поверхности (R_a) трубок щечных не превышает 0,31 мкм.

Эмалевые адгезивы, применяемые для крепления трубок щечных к поверхности эмали (если это требуется), должны обеспечивать удерживающее усилие не менее 30 Н.

Твердость поверхности по Виккерсу составляет 250-330 Hv при нагрузке $F=9,8$ Н время удержания $T=10$ с.

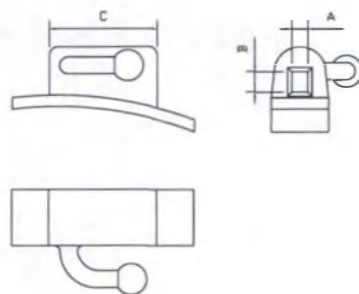


Рисунок. Трубка щечная

Размеры Трубок щечных:


Размер, мм		
A	B	C
$0,55 \pm 0,2$	$0,9 \pm 0,3$	$3,5 \pm 1,0$

Характеристики кнопок лингвальных (допустимые неуказанные отклонения $\pm 10\%$)

Средняя шероховатость поверхности (R_a) лингвальных кнопок не превышает $0,30 \text{ мкм}$

Эмалевые адгезивы, применяемые для крепления лингвальных кнопок к сетке и поверхности эмали (если это требуется), должны обеспечивать удерживающее усилие не менее 20 Н .

Твердость поверхности по Виккерсу составляет $250-330 \text{ Hv}$ при нагрузке $F=9,8 \text{ Н}$ время удержания $T=10 \text{ с}$.

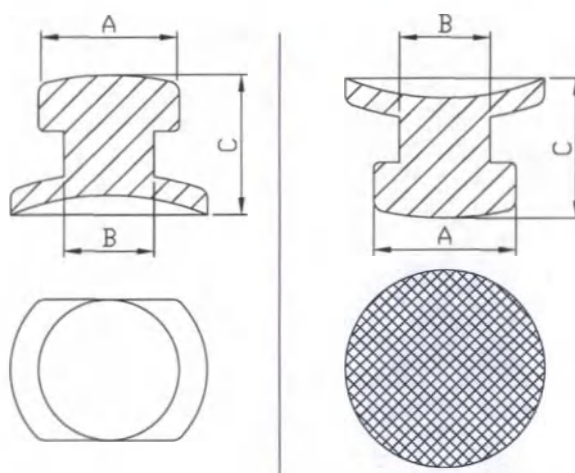

Лингвальная кнопка для
приклеивания

Лингвальная кнопка для
припаивания

Рисунок. Лингвальная кнопка

Размеры лингвальных кнопок:

Единица измерения : мм

Спецификация	Размер		
	A	B	C
Кнопка лингвальная для припаивания	2 ± 0.2	1.5 ± 0.3	1.8 ± 0.8
Кнопка лингвальная для приклеивания	2 ± 0.2	1.5 ± 0.3	1.8 ± 0.8
Кнопка лингвальная прямоугольная	2 ± 0.2	1.5 ± 0.3	1.8 ± 0.8

Спецификация	Высота	Диаметр	Длина цепочки
Кнопка на цепочке -прямоугольная	2.6 ± 0.3	3.3 ± 0.3 $(3.2 \times 3.7) \pm 0.3$	Не менее 20,0

Характеристики замка лингвального (допустимые неуказанные отклонения $\pm 10\%$)

Средняя шероховатость поверхности (R_a) замка не превышает 0,31 мкм.

Твердость поверхности по Виккерсу составляет 250-330 Hv при нагрузке $F=9,8$ Н время удержания $T=10$ с.

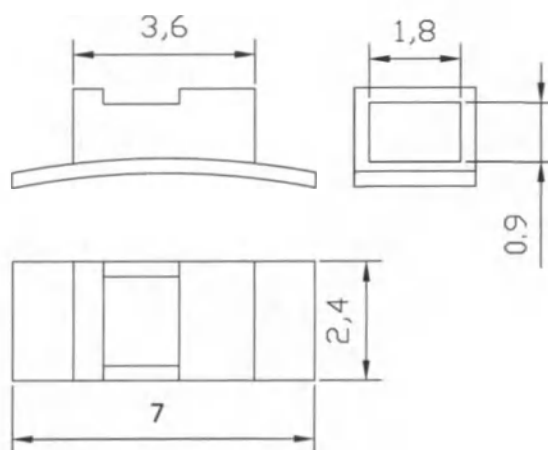


Рисунок. Замок лингвальный

Характеристики крючков (допустимые неуказанные отклонения $\pm 10\%$)

Средняя шероховатость поверхности (R_a) фиксирующих крючков не превышает 0,35 мкм.

Твердость поверхности по Виккерсу составляет 250-330 Hv при нагрузке $F=9,8$ Н время удержания $T=10$ с.

Фиксирующие крючки имеют яркую поверхность без пятен, выступающих или острых краев, а также других дефектов.

Крючок для установки в самолигирующий металлический брекет РТ-5


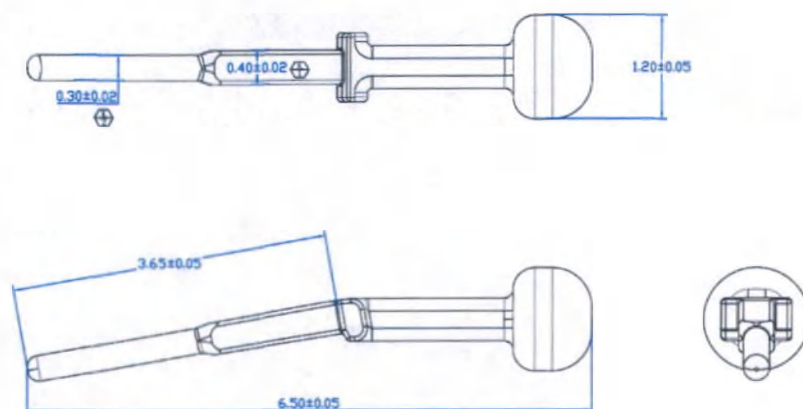


Рисунок. Крючки

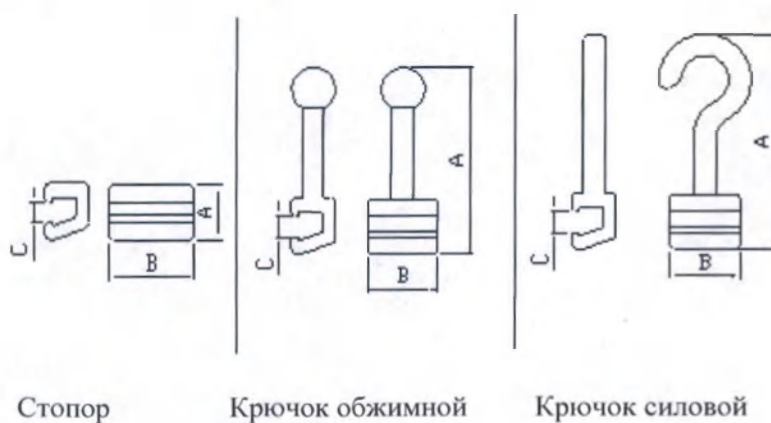

Размеры крючков:

Единица измерения : мм

Размер	Спецификация		A	B	C
	Крючки	Крючок обжимной	4,7±0,1	2,2±0,2	0,7±0,1
		Крючок силовой	Длинный (L, R): 11,5; Средний (L, R): 8,7; Короткий (L, R): 7,3; Двойной (L, R): 10; Тройной (L, R): 13; ±0,1 мм	2,2±0,3	0,7±0,1

	Стопор	$1,6 \pm 0,1$	$2,2 \pm 0,1$	$0,7 \pm 0,1$
--	--------	---------------	---------------	---------------

Характеристики брекета накусочного (допустимые неуказанные отклонения $\pm 10\%$)

Средняя шероховатость поверхности (R_a) замка не превышает $0,31 \text{ мкм}$.

Твердость поверхности по Виккерсу составляет $250-330 \text{ Hv}$ при нагрузке $F=9,8 \text{ Н}$ время удержания $T=10 \text{ с}$.

Размеры брекета накусочного:

Размер, мм		
Длина	Ширина	Высота
$4,6 \pm 0,2$	$4,0 \pm 0,2$	$3,1 \pm 0,2$

Характеристики дуги и пружины (допустимые неуказанные отклонения $\pm 10\%$)

Дуги и нитиноловые пружины имеют поверхность со средней шероховатостью (R_a) не более $3,2 \text{ мкм}$ без заметных трещин, царапин, складок и других дефектов.

Прочность на растяжение дуг и нитиноловой пружины не менее 1400 МПа .

Нитиноловая проволоочная дуга имеет гибкость, позволяющую добиться прогибания на испытательном стенде более чем в 25 раз.



Рисунок. Дуга круглая



Рисунок. Дуга прямоугольная

Длина дуг от 130 до 380 мм

Обозначение	Размер сечения, мм, $\pm 10\%$
Дуга нитиноловая термоактивная универсальная со стопорами Copper NiTi .013	0,33
Дуга нитиноловая термоактивная универсальная со стопорами Copper NiTi .014	0,36
Дуга нитиноловая термоактивная универсальная со стопорами Copper NiTi .016	0,41
Дуга нитиноловая термоактивная универсальная со стопорами Copper NiTi .018	0,46
Дуга нитиноловая термоактивная универсальная со стопорами Copper NiTi .020	0,51
Дуга нитиноловая термоактивная универсальная со стопорами Copper NiTi .014x.025	0,36 x 0,64
Дуга нитиноловая термоактивная универсальная со стопорами Copper NiTi .016x.025	0,41 x 0,64
Дуга нитиноловая термоактивная универсальная со стопорами Copper NiTi .018x.025	0,46 x 0,64
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Oval Lower .012	0,31
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Oval Upper .012	0,31
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Oval Lower .014	0,36
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Oval Upper .014	0,36
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Oval Lower .016	0,41
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Oval Upper .016	0,41
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Oval Lower .018	0,46
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Oval Upper .018	0,46
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Oval Lower .020	0,51
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Oval Upper .020	0,51

Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Lower .014x.025	0,36 x 0,64
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Upper .014x.025	0,36 x 0,64
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Lower .016x.016	0,41 x 0,41
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Upper .016x.016	0,41 x 0,41
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Lower .016x.022	0,41 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Upper .016x.022	0,41 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Lower .017x.022	0,43 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Upper .017x.022	0,43 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Lower .018x.022	0,46 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Upper .018x.022	0,46 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Lower .017x.025	0,43 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Upper .017x.025	0,43 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Lower .018x.025	0,46 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Upper .018x.025	0,46 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Lower .019x.025	0,48 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Upper .019x.025	0,48 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Lower .021x.025	0,53 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Upper .021x.025	0,53 x 0,60

Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Taper Lower .012	0,31
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Taper Upper .012	0,31
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Taper Lower .014	0,36
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Taper Upper .014	0,36
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Taper Lower .016	0,41
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Taper Upper .016	0,41
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Taper Lower .018	0,46
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Taper Upper .018	0,46
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Taper Lower .020	0,51
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Taper Upper .020	0,51
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Taper Lower .014x.025	0,36 x 0,64
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Taper Upper .014x.025	0,36 x 0,64
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Taper Lower .016x.016	0,41 x 0,41
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Taper Upper .016x.016	0,41 x 0,41
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Taper Lower .016x.022	0,41 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Taper Upper .016x.022	0,41 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Taper Lower .017x.022	0,43 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Taper Upper .017x.022	0,43 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Taper Lower .018x.022	0,46 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Taper Upper .018x.022	0,46 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Taper Lower .017x.025	0,43 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Taper Upper .017x.025	0,43 x 0,60

Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Taper Lower .018x.025	0,46 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Taper Upper .018x.025	0,46 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Taper Lower .019x.025	0,48 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Taper Upper .019x.025	0,48 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Taper Lower .021x.025	0,53 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Taper Upper .021x.025	0,53 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Square Lower .012	0,31
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Square Upper .012	0,31
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Square Lower .014	0,36
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Square Upper .014	0,36
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Square Lower .016	0,41
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Square Upper .018	0,41
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Square Lower .018	0,46
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Square Upper .018	0,46
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Square Lower .020	0,51
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Square Upper .020	0,51
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Square Lower .014x.025	0,36 x 0,64
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Square Upper .014x.025	0,36 x 0,64
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Square Lower .016x.016	0,41 x 0,41
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Square Upper .016x.016	0,41 x 0,41
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Square Lower .016x.022	0,41 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Square Upper .016x.022	0,41 x 0,56

Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Square Lower .017x.022	0,43 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Square Upper .017x.022	0,43 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Square Lower .018x.022	0,46 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Square Upper .018x.022	0,46 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Square Lower .017x.025	0,43 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Square Upper .017x.025	0,43 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Square Lower .018x.025	0,46 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Square Upper .018x.025	0,46 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Square Lower .019x.025	0,48 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Square Upper .019x.025	0,48 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Square Lower .021x.025	0,53 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Square Upper .021x.025	0,53 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Natural Lower .012	0,31
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Natural Upper .012	0,31
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Natural Lower .014	0,36
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Natural Upper .014	0,36
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Natural Lower .016	0,41
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Natural Upper .018	0,41
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Natural Lower .018	0,46
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Natural Upper .018	0,46
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Natural Lower .020	0,51
Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Natural Upper .020	0,51

Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Natural Lower .014x.025	0,36 x 0,64
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Natural Upper .014x.025	0,36 x 0,64
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Natural Lower .016x.016	0,41 x 0,41
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Natural Upper .016x.016	0,41 x 0,41
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Natural Lower .016x.022	0,41 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Natural Upper .016x.022	0,41 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Natural Lower .017x.022	0,43 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Natural Upper .017x.022	0,43 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Natural Lower .018x.022	0,46 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Natural Upper .018x.022	0,46 x 0,56
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Natural Lower .017x.025	0,43 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Natural Upper .017x.025	0,43 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Natural Lower .018x.025	0,46 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Natural Upper .018x.025	0,46 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Natural Lower .019x.025	0,48 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Natural Upper .019x.025	0,48 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Natural Lower .021x.025	0,53 x 0,60
Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Natural Upper .021x.025	0,53 x 0,60

Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Oval Lower .012	0,31
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Oval Upper .012	0,31
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Oval Lower .014	0,36
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Oval Upper .014	0,36
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Oval Lower .016	0,41
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Oval Upper .016	0,41
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Oval Lower .018	0,46
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Oval Upper .018	0,46
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Oval Lower .020	0,51
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Oval Upper .020	0,51
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Oval Lower .014X.025	0,36 x 0,64
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Oval Upper .014X.025	0,36 x 0,64
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Oval Lower .016X.016	0,41 x 0,41
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Oval Upper .016X.016	0,41 x 0,41
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Oval Lower .016X.022	0,41 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Oval Upper .016X.022	0,41 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Oval Lower .017X.022	0,43 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Oval Upper .017X.022	0,43 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Oval Lower .018X.022	0,46 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Oval Upper .018X.022	0,46 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Oval Lower .017X.025	0,43 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Oval Upper .017X.025	0,43 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Oval Lower .018X.025	0,46 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Oval Upper .018X.025	0,46 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Oval Lower .019X.025	0,48 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Oval Upper .019X.025	0,48 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Oval Lower .021X.025	0,53 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Oval Upper .021X.025	0,53 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Taper Lower .012	0,31

Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Taper Upper .012	0,31
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Taper Lower .014	0,36
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Taper Upper .014	0,36
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Taper Lower .016	0,41
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Taper Upper .016	0,41
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Taper Lower .018	0,46
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Taper Upper .018	0,46
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Taper Lower .020	0,51
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Taper Upper .020	0,51
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Taper Lower .014X.025	0,36 x 0,64
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Taper Upper .014X.025	0,36 x 0,64
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Taper Lower .016X.016	0,41 x 0,41
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Taper Upper .016X.016	0,41 x 0,41
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Taper Lower .016X.022	0,41 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Taper Upper .016X.022	0,41 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Taper Lower .017X.022	0,43 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Taper Upper .017X.022	0,43 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Taper Lower .018X.022	0,46 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Taper Upper .018X.022	0,46 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Taper Lower .017X.025	0,43 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Taper Upper .017X.025	0,43 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Taper Lower .018X.025	0,46 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Taper Upper .018X.025	0,46 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Taper Lower .019X.025	0,48 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Taper Upper .019X.025	0,48 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Taper Lower .021X.025	0,53 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Taper Upper .021X.025	0,53 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Square Lower .012	0,31
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Square Upper .012	0,31

Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Square Lower .014	0,36
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Square Upper .014	0,36
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Square Lower .016	0,41
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Square Upper .016	0,41
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Square Lower .018	0,46
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Square Upper .018	0,46
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Square Lower .020	0,51
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Square Upper .020	0,51
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Square Lower .014X.025	0,36 x 0,64
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Square Upper .014X.025	0,36 x 0,64
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Square Lower .016X.016	0,41 x 0,41
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Square Upper .016X.016	0,41 x 0,41
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Square Lower .016X.022	0,41 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Square Upper .016X.022	0,41 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Square Lower .017X.022	0,43 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Square Upper .017X.022	0,43 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Square Lower .018X.022	0,46 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Square Upper .018X.022	0,46 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Square Lower .017X.025	0,43 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Square Upper .017X.025	0,43 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Square Lower .018X.025	0,46 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Square Upper .018X.025	0,46 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Square Lower .019X.025	0,48 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Square Upper .019X.025	0,48 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Square Lower .021X.025	0,53 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Square Upper .021X.025	0,53 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Natural Lower .012	0,31
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Natural Upper .012	0,31
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Natural Lower .014	0,36

Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Natural Upper .014	0,36
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Natural Lower .016	0,41
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Natural Upper .016	0,41
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Natural Lower .018	0,46
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Natural Upper .018	0,46
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Natural Lower .020	0,51
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Natural Upper .020	0,51
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Natural Lower .014X.025	0,36 x 0,64
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Natural Upper .014X.025	0,36 x 0,64
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Natural Lower .016X.016	0,41 x 0,41
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Natural Upper .016X.016	0,41 x 0,41
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Natural Lower .016X.022	0,41 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Natural Upper .016X.022	0,41 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Natural Lower .017X.022	0,43 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Natural Upper .017X.022	0,43 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Natural Lower .018X.022	0,46 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Natural Upper .018X.022	0,46 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Natural Lower .017X.025	0,43 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Natural Upper .017X.025	0,43 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Natural Lower .018X.025	0,46 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Natural Upper .018X.025	0,46 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Natural Lower .019X.025	0,48 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Natural Upper .019X.025	0,48 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Natural Lower .021X.025	0,53 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Natural Upper .021X.025	0,53 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Reverse Curve Lower .012	0,31
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Reverse Curve Upper .012	0,31
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Reverse Curve Lower .014	0,36
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Reverse Curve Upper .014	0,36

Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Reverse Curve Lower .016	0,41
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Reverse Curve Upper .016	0,41
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Reverse Curve Lower .018	0,46
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Reverse Curve Upper .018	0,46
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Reverse Curve Lower .020	0,51
Дуга нитиноловая термоактивная круглая NiTi Reverse Curve Upper .020	0,51
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Reverse Curve Lower .014X.025	0,36 x 0,64
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Reverse Curve Upper .014X.025	0,36 x 0,64
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Reverse Curve Lower .016X.016	0,41 x 0,41
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Reverse Curve Upper .016X.016	0,41 x 0,41
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Reverse Curve Lower .016X.022	0,41 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Reverse Curve Upper .016X.022	0,41 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Reverse Curve Lower .017X.022	0,43 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Reverse Curve Upper .017X.022	0,43 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Reverse Curve Lower .018X.022	0,46 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Reverse Curve Upper .018X.022	0,46 x 0,56
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Reverse Curve Lower .017X.025	0,43 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Reverse Curve Upper .017X.025	0,43 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Reverse Curve Lower .018X.025	0,46 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Reverse Curve Upper .018X.025	0,46 x 0,60

Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Reverse Curve Lower .019X.025	0,48 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Reverse Curve Upper .019X.025	0,48 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Reverse Curve Lower .021X.025	0,53 x 0,60
Дуга нитиноловая термоактивная прямоугольная NiTi Reverse Curve Upper .021X.025	0,53 x 0,60
Дуга нитиноловая с покрытием круглая NiTi SE Lower .012	0,31
Дуга нитиноловая с покрытием круглая NiTi SE Upper .012	0,31
Дуга нитиноловая с покрытием круглая NiTi SE Lower .014	0,36
Дуга нитиноловая с покрытием круглая NiTi SE Upper .014	0,36
Дуга нитиноловая с покрытием круглая NiTi SE Lower .016	0,41
Дуга нитиноловая с покрытием круглая NiTi SE Upper .016	0,41
Дуга нитиноловая с покрытием круглая NiTi SE Lower .018	0,46
Дуга нитиноловая с покрытием круглая NiTi SE Upper .018	0,46
Дуга нитиноловая с покрытием круглая NiTi SE Lower .020	0,51
Дуга нитиноловая с покрытием круглая NiTi SE Upper .020	0,51
Дуга нитиноловая с покрытием прямоугольная NiTi SE Lower .014X.025	0,36 x 0,64
Дуга нитиноловая с покрытием прямоугольная NiTi SE Upper .014X.025	0,36 x 0,64
Дуга нитиноловая с покрытием прямоугольная NiTi SE Lower .016X.016	0,41 x 0,41
Дуга нитиноловая с покрытием прямоугольная NiTi SE Upper .016X.016	0,41 x 0,41
Дуга нитиноловая с покрытием прямоугольная NiTi SE Lower .016X.022	0,41 x 0,56
Дуга нитиноловая с покрытием прямоугольная NiTi SE Upper .016X.022	0,41 x 0,56
Дуга нитиноловая с покрытием прямоугольная NiTi SE Lower .017X.022	0,43 x 0,56
Дуга нитиноловая с покрытием прямоугольная NiTi SE Upper .017X.022	0,43 x 0,56
Дуга нитиноловая с покрытием прямоугольная NiTi SE Lower .018X.022	0,46 x 0,56
Дуга нитиноловая с покрытием прямоугольная NiTi SE Upper .018X.022	0,46 x 0,56
Дуга нитиноловая с покрытием прямоугольная NiTi SE Lower .017X.025	0,43 x 0,60
Дуга нитиноловая с покрытием прямоугольная NiTi SE Upper .017X.025	0,43 x 0,60

Дуга нитиноловая с покрытием прямоугольная NiTi SE Lower .018X.025	0,46 x 0,60
Дуга нитиноловая с покрытием прямоугольная NiTi SE Upper .018X.025	0,46 x 0,60
Дуга нитиноловая с покрытием прямоугольная NiTi SE Lower .019X.025	0,48 x 0,60
Дуга нитиноловая с покрытием прямоугольная NiTi SE Upper .019X.025	0,48 x 0,60
Дуга нитиноловая с покрытием прямоугольная NiTi SE Lower .021X.025	0,53 x 0,60
Дуга нитиноловая с покрытием прямоугольная NiTi SE Upper .021X.025	0,53 x 0,60
Дуга стальная круглая SS Lower .012	0,31
Дуга стальная круглая SS Upper .012	0,31
Дуга стальная круглая SS Lower .014	0,36
Дуга стальная круглая SS Upper .014	0,36
Дуга стальная круглая SS Lower .016	0,41
Дуга стальная круглая SS Upper .016	0,41
Дуга стальная круглая SS Lower .018	0,46
Дуга стальная круглая SS Upper .018	0,46
Дуга стальная круглая SS Lower .020	0,51
Дуга стальная круглая SS Upper .020	0,51
Дуга стальная прямоугольная SS Lower .014X.025	0,36 x 0,64
Дуга стальная прямоугольная SS Upper .014X.025	0,36 x 0,64
Дуга стальная прямоугольная SS Lower .016X.016	0,41 x 0,41
Дуга стальная прямоугольная SS Upper .016X.016	0,41 x 0,41
Дуга стальная прямоугольная SS Lower .016X.022	0,41 x 0,56
Дуга стальная прямоугольная SS Upper .016X.022	0,41 x 0,56
Дуга стальная прямоугольная SS Lower .016X.025	0,41 x 0,60
Дуга стальная прямоугольная SS Upper .016X.025	0,41 x 0,60
Дуга стальная прямоугольная SS Lower .017X.025	0,43 x 0,60
Дуга стальная прямоугольная SS Upper .017X.025	0,43 x 0,60
Дуга стальная прямоугольная SS Lower .018X.025	0,46 x 0,60
Дуга стальная прямоугольная SS Upper .018X.025	0,46 x 0,60
Дуга стальная прямоугольная SS Lower .019X.025	0,48 x 0,60

Дуга стальная прямоугольная SS Upper .019X.025	0,48 x 0,60
Дуга стальная прямоугольная SS Lower .021X.025	0,53 x 0,60
Дуга стальная прямоугольная SS Upper .021X.025	0,53 x 0,60
Дуга стальная для изгибания SS .016x.016 - 10 шт. в тубе – не более 10 туб;	0,41 x 0,41
Дуга стальная для изгибания SS .016x.022 - 10 шт. в тубе– не более 10 туб;	0,41 x 0,56
Дуга стальная для изгибания SS .017x.022 - 10 шт. в тубе– не более 10 туб;	0,43 x 0,56
Дуга стальная для изгибания SS .017x.025 - 10 шт. в тубе– не более 10 туб;	0,43 x 0,60
Дуга стальная для изгибания SS .018x.022 - 10 шт. в тубе– не более 10 туб;	0,46 x 0,56
Дуга стальная для изгибания SS .018x.025 - 10 шт. в тубе– не более 10 туб;	0,46 x 0,60
Дуга стальная для изгибания SS .019x.025 - 10 шт. в тубе– не более 10 туб;	0,48 x 0,60
Дуга стальная для изгибания SS .021x.025 - 10 шт. в тубе– не более 10 туб;	0,53 x 0,60
Дуга стальная плетеная шестижильная SS .0155x6 - 10 шт. в тубе– не более 10 туб;	0,41
Дуга стальная плетеная шестижильная SS .0175x6 - 10 шт. в тубе– не более 10 туб;	0,45
Дуга стальная плетеная шестижильная SS .0195x6 - 10 шт. в тубе– не более 10 туб;	0,51
Дуга стальная плетеная шестижильная SS .0215x6 - 10 шт. в тубе– не более 10 туб;	0,56
Дуга круглая TMA Universal Lower .012	0,31
Дуга круглая TMA Universal Upper .012	0,31
Дуга круглая TMA Universal Lower .014	0,36
Дуга круглая TMA Universal Upper .014	0,36
Дуга круглая TMA Universal Lower .016	0,41
Дуга круглая TMA Universal Upper .016	0,41
Дуга круглая TMA Universal Lower .018	0,46
Дуга круглая TMA Universal Upper .018	0,46
Дуга круглая TMA Universal Lower .020	0,51
Дуга круглая TMA Universal Upper .020	0,51
Дуга прямоугольная TMA Universal Lower .014X.025	0,36 x 0,64

Дуга прямоугольная TMA Universal Upper .014X.025	0,36 x 0,64
Дуга прямоугольная TMA Universal Lower .016X.016	0,41 x 0,41
Дуга прямоугольная TMA Universal Upper .016X.016	0,41 x 0,41
Дуга прямоугольная TMA Universal Lower .016X.022	0,41 x 0,56
Дуга прямоугольная TMA Universal Upper .016X.022	0,41 x 0,56
Дуга прямоугольная TMA Universal Lower .017X.022	0,43 x 0,56
Дуга прямоугольная TMA Universal Upper .017X.022	0,43 x 0,56
Дуга прямоугольная TMA Universal Lower .017X.025	0,43 x 0,60
Дуга прямоугольная TMA Universal Upper .017X.025	0,43 x 0,60
Дуга прямоугольная TMA Universal Lower .018X.022	0,46 x 0,56
Дуга прямоугольная TMA Universal Upper .018X.022	0,46 x 0,56
Дуга прямоугольная TMA Universal Lower .018X.025	0,46 x 0,60
Дуга прямоугольная TMA Universal Upper .018X.025	0,46 x 0,60
Дуга прямоугольная TMA Universal Lower .019X.025	0,48 x 0,60
Дуга прямоугольная TMA Universal Upper .019X.025	0,48 x 0,60
Дуга прямоугольная TMA Universal Lower .021X.025	0,53 x 0,60
Дуга прямоугольная TMA Universal Upper .021X.025	0,53 x 0,60

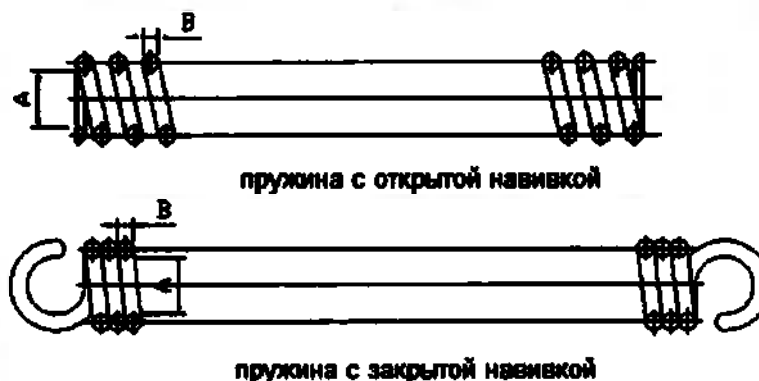


Рисунок. Пружины

Размеры пружин:


Спецификация	В, Диаметр сечения пружины, мм	А, Внутренний диаметр, мм	Длина пружин, мм
Пружина на сжатие NiTi Open 0.010X180 мм	0,25	0,81	180
Пружина на сжатие NiTi Open 0.012X180 мм	0,30	0,81	180
Пружина с маленькими петлями NiTi Close 0.008x6 мм	0,20	0,81	6
Пружина с маленькими петлями NiTi Close 0.008x9	0,20	0,81	9
Пружина с маленькими петлями NiTi Close 0.008x12 мм	0,20	0,81	12
Пружина с маленькими петлями NiTi Close 0.010x6 мм	0,25	0,81	6
Пружина с маленькими петлями NiTi Close 0.010x9 мм	0,25	0,81	9
Пружина с маленькими петлями NiTi Close 0.010x12 мм	0,25	0,81	12
Пружина с маленькими петлями NiTi Close 0.012x6 мм	0,30	0,81	6
Пружина с маленькими петлями NiTi Close 0.012x9 мм	0,30	0,81	9
Пружина с маленькими петлями NiTi Close 0.012x12 мм	0,30	0,81	12
Пружина с большими петлями NiTi Close 0.008x6 мм	0,20	0,81	6
Пружина с большими петлями NiTi Close 0.008x9 мм	0,20	0,81	9
Пружина с большими петлями NiTi Close 0.008x12 мм	0,20	0,81	12
Пружина с большими петлями NiTi Close 0.010x6 мм	0,25	0,81	6
Пружина с большими петлями NiTi Close 0.010x8 мм	0,25	0,81	8
Пружина с большими петлями NiTi Close 0.010x12 мм	0,25	0,81	12
Пружина торковая NiTi 0.16x0.22 мм	0,30	0,60	6
Пружина торковая NiTi 0.18x0.25 мм	0,40	0,64	6

Характеристики эластичных тяг (допустимые неуказанные отклонения $\pm 10\%$)

Ортодонтические эластичные тяги изготавливаются из полиуретана.

Ортодонтическая эластичная тяга имеет высокую степень эластичности.

Модели и размеры ортодонтических эластичных тяг показаны в таблице.

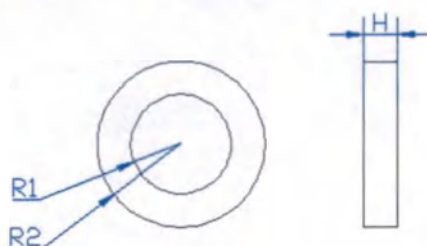


Размеры ортодонтических эластичных тяг:

Спецификация	Наружный радиус, мм	Внутренний радиус, мм	Ширина, мм
Лиса	$4,0 \pm 1,0$	$3,0 \pm 1,0$	$1 \pm 1,0$
Обезьяна	$6,0 \pm 1,0$	$5,0 \pm 1,0$	$1 \pm 1,0$
Кролик	$3,5 \pm 1,0$	$2,2 \pm 1,0$	$1 \pm 1,0$
Белка	$2,5 \pm 1,0$	$1,2 \pm 1,0$	$1 \pm 1,0$
Пингвин	$5,0 \pm 1,0$	$4,0 \pm 1,0$	$1 \pm 1,0$

Характеристики замка лингвального (допустимые неуказанные отклонения $\pm 10\%$)

Лингвальный замок на бандажных кольцах используются для удержания дуг от съемных аппаратов, таких как транснёбные расширители, нижние язычные дуги и другие аппараты.

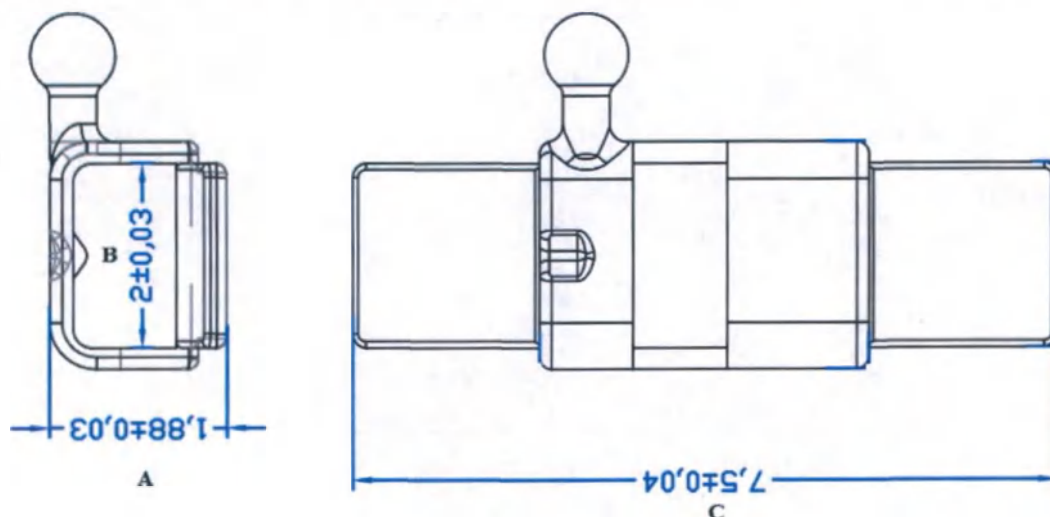


A/мм	B/мм	C/мм
------	------	------

1,88±0,03	2±0,03	7,5±0,04
-----------	--------	----------

Характеристики шипа языкового (допустимые неуказанные отклонения ±10%)

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Отверстие, мм
2,5±0,2	3,5±0,2	3,0±0,2	1,0±0,2

Характеристики ретейнеров (допустимые неуказанные отклонения ±10%)

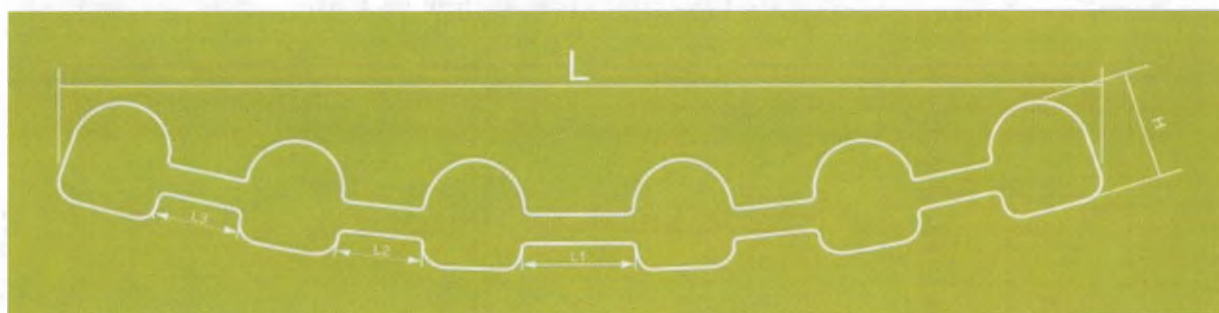

Ретейнер на верхнюю челюсть	22	24	26	28	30
L	35,3	37,0	40,1	42,7	45,7
L1	3,6	3,9	4,4	5,3	6,0
L2	2,8	3,1	4,1	4,5	4,9
L3	2,6	3,0	3,5	3,9	4,5
H	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

Ретейнер на нижнюю челюсть	27	29	31	33	35
L	27,5	29,5	31,1	33,3	35,1
L1	0,8	1,3	1,8	2,5	3,1
L2	1,4	1,7	2,2	2,5	2,9

L3	1,6	2,0	2,1	2,6	2,7
H	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

Характеристики маски лицевой

Спецификация	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм
Маска лицевая	240,0	85,0	66,0
Допустимое отклонение не превышает 10%			

4. Ассортимент медицинского изделия:

I. Система ортодонтическая регулируемая

1. Брекеты в наборах

1.1. Набор брекетов металлических самолигирующих .022 PT-5 Roth, в составе:
 Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 PT-5 Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб .022 PT-5 Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет клык прав. в.ч., 13 зуб, .022 PT-5 Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 1прем.прав. в.ч., 14 зуб, .022 PT-5 Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 2прем.прав. в.ч., 15 зуб, .022 PT-5 Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 PT-5 Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 PT-5 Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет клык лев. в.ч., 23 зуб, .022 PT-5 Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 1прем.лев. в.ч., 24 зуб, .022 PT-5 Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 2прем.лев. в.ч. 25 зуб, .022 PT-5 Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 PT-5 Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 PT-5 Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет клык лев. н.ч., 33 зуб, .022 PT-5 Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 1прем.лев. н.ч., 34 зуб, .022 PT-5 Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 2прем.лев. н.ч., 35 зуб, .022 PT-5 Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 PT-5 Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 PT-5 Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет клык прав. н.ч., 43 зуб, .022 PT-5 Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 1прем.прав. н.ч., 44 зуб, .022 PT-5 Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 2прем.прав. н.ч., 45 зуб, .022 PT-5 Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.2. Набор брекетов металлических самолигирующих .022 PT-5 MBT, в составе:
 Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 PT-5 MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб .022 PT-5 MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет клык прав. в.ч., 13 зуб, .022 PT-5 MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 1прем.прав. в.ч., 14 зуб, .022 PT-5 MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 2прем.прав. в.ч., 15 зуб, .022 PT-5 MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 PT-5 MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 PT-5 MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет клык лев. в.ч., 23 зуб, .022 PT-5 MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 1прем.лев. в.ч., 24 зуб, .022 PT-5 MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 2прем.лев. в.ч. 25 зуб, .022 PT-5 MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 PT-5 MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч., 33 зуб, .018 PT-5 Middle Torque (Торк +7°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. н.ч., 34 зуб, .018 PT-5 Middle Torque (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. н.ч., 35 зуб, .018 PT-5 Middle Torque (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 PT-5 Middle Torque (Торк -2°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .018 PT-5 Middle Torque (Торк -2°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. н.ч., 43 зуб, .018 PT-5 Middle Torque (Торк +7°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. н.ч., 44 зуб, .018 PT-5 Middle Torque (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч., 45 зуб, .018 PT-5 Middle Torque (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

1.9. Набор брекетов металлических самолигирующих .018 PT-5 Low Torque, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 PT-5 Low Torque (Торк +3°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 PT-5 Low Torque (Торк -4°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. в.ч., 13 зуб, .018 PT-5 Low Torque (Торк -8°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 PT-5 Low Torque (Торк +3°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 PT-5 Low Torque (Торк -4°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. в.ч., 23 зуб, .018 PT-5 Low Torque (Торк -8°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .018 PT-5 Low Torque (Торк -10°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 PT-5 Low Torque (Торк -10°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. н.ч., 33 зуб, .018 PT-5 Low Torque (Торк 0°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 PT-5 Low Torque (Торк -10°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .018 PT-5 Low Torque (Торк -10°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. н.ч., 43 зуб, .018 PT-5 Low Torque (Торк 0°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.

1.10. Набор брекетов металлических самолигирующих .018 PT-5 High Torque, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 PT-5 High Torque (Торк +23°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 PT-5 High Torque (Торк +14°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. в.ч., 13 зуб, .018 PT-5 High Torque (Торк +12°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 PT-5 High Torque (Торк +23°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 PT-5 Torque (Торк +14°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. в.ч., 23 зуб, .018 PT-5 High Torque (Торк +12°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. н.ч., 33 зуб, .018 PT-5 High Torque (Торк +14°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. н.ч., 34 зуб, .018 PT-5 High Torque (Торк -4°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. н.ч., 43 зуб, .018 PT-5 High Torque (Торк +14°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. н.ч., 44 зуб, .018 PT-5 High Torque (Торк -4°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

1.11. Набор самолигирующих металлических брекетов .022 PT-5 2nd Roth, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 PT-5 2nd Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 PT-5 2nd Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. в.ч., 13 зуб, .022 PT-5 2nd Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. в.ч., 14 зуб, .022 PT-5 2nd Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.прав. в.ч., 15 зуб, .022 PT-5 2nd Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 PT-5 2nd Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 PT-5 2nd Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. в.ч., 23 зуб, .022 PT-5 2nd Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. в.ч., 24 зуб, .022 PT-5 2nd Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. в.ч., 25 зуб, .022 PT-5 2nd Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 PT-5 2nd Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 PT-5 2nd Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. н.ч., 33 зуб, .022 PT-5 2nd Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. н.ч., 34 зуб, .022 PT-5 2nd Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. н.ч., 35 зуб, .022 PT-5 2nd Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 PT-5 2nd Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 PT-5 2nd Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. н.ч., 43 зуб, .022 PT-5 2nd Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. н.ч., 44 зуб, .022 PT-5 2nd Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.прав. н.ч., 45 зуб, .022 PT-5 2nd Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.12. Набор самолигирующих металлических брекетов .022 PT-5 2nd MBT, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 PT-5 2nd MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 PT-5 2nd MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет клык прав. в.ч., 13 зуб, .022 PT-5 2nd MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 1прем.прав. в.ч., 14 зуб, .022 PT-5 2nd MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 2прем.прав. в.ч., 15 зуб, .022 PT-5 2nd MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 PT-5 2nd MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 PT-5 2nd MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет клык лев. в.ч., 23 зуб, .022 PT-5 2nd MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 1прем.лев. в.ч., 24 зуб, .022 PT-5 2nd MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 2прем.лев. в.ч. 25 зуб, .022 PT-5 2nd MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 PT-5 2nd MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 PT-5 2nd MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет клык лев. н.ч., 33 зуб, .018 PT-5 2nd MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 1прем.лев. н.ч., 34 зуб, .022 PT-5 2nd MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 2прем.лев. н.ч., 35 зуб, .022 PT-5 2nd MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 PT-5 2nd MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 PT-5 2nd MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет клык прав. н.ч., 43 зуб, .022 PT-5 2nd MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 1прем.прав. н.ч., 44 зуб, .022 PT-5 2nd MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 2прем.прав. н.ч., 45 зуб, .022 PT-5 2nd MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.13. Набор самолигирующих металлических брекетов .022 PT-5 2nd Middle Torque, в составе:
 Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 PT-5 2nd Middle Torque (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 PT-5 2nd Middle Torque (Торк +9°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет клык прав. в.ч., 13 зуб, .022 PT-5 2nd Middle Torque (Торк +7°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 1прем.прав. в.ч., 14 зуб, .022 PT-5 2nd Middle Torque (Торк -8°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 2прем.прав. в.ч., 15 зуб, .022 PT-5 2nd Middle Torque (Торк -8°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 PT-5 2nd Middle Torque (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 PT-5 2nd Middle Torque (Торк +9°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет клык лев. в.ч., 23 зуб, .022 PT-5 2nd Middle Torque (Торк +7°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 1прем.лев. в.ч., 24 зуб, .022 PT-5 2nd Middle Torque (Торк -8°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 2прем.лев. в.ч. 25 зуб, .022 PT-5 2nd Middle Torque (Торк -8°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 PT-5 2nd Middle Torque (Торк -2°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 PT-5 2nd Middle Torque (Торк -2°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет клык лев. н.ч., 33 зуб, .022 PT-5 2nd Middle Torque (Торк +7°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 1прем.лев. н.ч., 34 зуб, .022 PT-5 2nd Middle Torque (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 2прем.лев. н.ч., 35 зуб, .022 PT-5 2nd Middle Torque (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 PT-5 2nd Middle Torque (Торк -2°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 PT-5 2nd Middle Torque (Торк -2°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
 Брекет клык прав. н.ч., 43 зуб, .022 PT-5 2nd Middle Torque (Торк +7°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч., 44 зуб, .022 PT-5 2nd Middle Torque (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч., 45 зуб, .022 PT-5 2nd Middle Torque (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

1.14. Набор самолигирующих металлических брекетов .022 PT-5 2nd Low Torque, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 PT-5 2nd Low Torque (Торк +3°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб .022 PT-5 2nd Low Torque (Торк -4°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч., 13 зуб, .022 PT-5 2nd Low Torque (Торк -8°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 PT-5 2nd Low Torque (Торк +3°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 PT-5 2nd Low Torque (Торк -4°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч., 23 зуб, .022 PT-5 2nd Low Torque (Торк -8°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 PT-5 2nd Low Torque (Торк -10°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 PT-5 2nd Low Torque (Торк -10°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч., 33 зуб, .022 PT-5 2nd Low Torque (Торк 0°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 PT-5 2nd Low Torque (Торк -10°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 PT-5 2nd Low Torque (Торк -10°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч., 43 зуб, .022 PT-5 2nd Low Torque (Торк 0°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.

1.15. Набор самолигирующих металлических брекетов .022 PT-5 2nd High Torque, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 PT-5 2nd High Torque (Торк +23°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб .022 PT-5 2nd High Torque (Торк +14°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч., 13 зуб, .022 PT-5 2nd High Torque (Торк +12°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 PT-5 2nd High Torque (Торк +23°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 PT-5 2nd High Torque (Торк +14°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч., 23 зуб, .022 PT-5 2nd High Torque (Торк +12°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч., 33 зуб, .022 PT-5 2nd High Torque (Торк +14°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч., 34 зуб, .022 PT-5 2nd High Torque (Торк -4°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч., 43 зуб, .022 PT-5 2nd High Torque (Торк +14°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч., 44 зуб, .022 PT-5 2nd High Torque (Торк -4°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.16. Набор самолигирующих металлических брекетов .022 PROTECT Ingenious Active MBT, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 PROTECT Ingenious Active MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб .022 PROTECT Ingenious Active MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч., 13 зуб, .022 PROTECT Ingenious Active MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч., 14 зуб, .022 PROTECT Ingenious Active MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч., 15 зуб, .022 PROTECT Ingenious Active MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 PROTECT Ingenious Active MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 PROTECT Ingenious Active MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. в.ч., 23 зуб, .022 PROTECT Ingenious Active MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. в.ч., 24 зуб, .022 PROTECT Ingenious Active MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. в.ч. 25 зуб, .022 PROTECT Ingenious Active MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 PROTECT Ingenious Active MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 PROTECT Ingenious Active MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. н.ч., 33 зуб, .022 PROTECT Ingenious Active MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. н.ч., 34 зуб, .022 PROTECT Ingenious Active MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. н.ч., 35 зуб, .022 PROTECT Ingenious Active MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 PROTECT Ingenious Active MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 PROTECT Ingenious Active MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. н.ч., 43 зуб, .022 PROTECT Ingenious Active MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. н.ч., 44 зуб, .022 PROTECT Ingenious Active MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.прав. н.ч., 45 зуб, .022 PROTECT Ingenious Active MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.17. Набор лигатурных металлических брекетов .022 MIM Roth, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 MIM Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 MIM Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 MIM Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .022 MIM Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 MIM Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 MIM Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 MIM Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 MIM Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 MIM Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .022 MIM Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 MIM Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 MIM Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 MIM Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 MIM Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 MIM Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 MIM Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 MIM Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 MIM Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 MIM Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 MIM Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.18. Набор лигатурных металлических брекетов .018 MIM Roth, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 MIM Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 MIM Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 MIM Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 MIM Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 MIM Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

1.21. Набор лигатурных металлических брекетов .022 MIM Mini Roth, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 MIM Mini Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 MIM Mini Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 MIM Mini Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .022 MIM Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 MIM Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 MIM Mini Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 MIM Mini Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 MIM Mini Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 MIM Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .022 MIM Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 MIM Mini Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 MIM Mini Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 MIM Mini Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 MIM Mini Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 MIM Mini Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 MIM Mini Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 MIM Mini Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 MIM Mini Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 MIM Mini Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 MIM Mini Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.22. Набор лигатурных металлических брекетов .018 MIM Mini Roth, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 MIM Mini Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 MIM Mini Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 MIM Mini Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 MIM Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 MIM Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 MIM Mini Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 MIM Mini Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 MIM Mini Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .018 MIM Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .018 MIM Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .018 MIM Mini Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 MIM Mini Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .018 MIM Mini Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .018 MIM Mini Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .018 MIM Mini Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 MIM Mini Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .018 MIM Mini Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .018 MIM Mini Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .018 MIM Mini Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .018 MIM Mini Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.23. Набор лигатурных металлических брекетов .022 MIM Mini MBT, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 MIM Mini MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 MIM Mini MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 MIM Mini MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .022 MIM Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 MIM Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 MIM Mini MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 MIM Mini MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 MIM Mini MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 MIM Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .022 MIM Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 MIM Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 MIM Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 MIM Mini MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 MIM Mini MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 MIM Mini MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 MIM Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 MIM Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 MIM Mini MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 MIM Mini MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 MIM Mini MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.24. Набор лигатурных металлических брекетов .018 MIM Mini MBT, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 MIM Mini MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 MIM Mini MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 MIM Mini MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 MIM Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 MIM Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 MIM Mini MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 MIM Mini MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 MIM Mini MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .018 MIM Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .018 MIM Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .018 MIM Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 MIM Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .018 MIM Mini MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .018 MIM Mini MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .018 MIM Mini MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 MIM Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .018 MIM Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .018 MIM Mini MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .018 MIM Mini MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .018 MIM Mini MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.25. Набор лигатурных металлических брекетов .022 Super Standart Roth, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 Super Standart Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 Super Standart Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 Super Standart Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .022 Super Standart Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 Super Standart Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 Super Standart Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 Super Standart Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 Super Standart Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 Super Standart Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .022 Super Standart Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 Super Standart Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 Super Standart Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 Super Standart Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 Super Standart Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 Super Standart Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 Super Standart Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 Super Standart Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 Super Standart Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 Super Standart Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 Super Standart Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.26. Набор лигатурных металлических брекетов .018 Super Standart Roth, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 Super Standart Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 Super Standart Roth (Торк +8°, Ang. +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 Super Standart Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 Super Standart Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 Super Standart Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 0 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 Super Standart Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 Super Standart Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 Super Standart Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .018 Super Standart Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч с НК, 25 зуб, .018 Super Standart Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .018 Super Standart Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 Super Standart Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .018 Super Standart Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .018 Super Standart Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .018 Super Standart Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 Super Standart Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .018 Super Standart Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .018 Super Standart Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .018 Super Standart Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .018 Super Standart Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

1.27. Набор лигатурных металлических брекетов .022 Super Standart MBT, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 Super Standart MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 Super Standart MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 Super Standart MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .022 Super Standart MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 Super Standart MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 Super Standart MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 Super Standart MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 Super Standart MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 Super Standart MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .022 Super Standart MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 Super Standart MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 Super Standart MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 Super Standart MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 Super Standart MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 Super Standart MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 Super Standart MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 Super Standart MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 Super Standart MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 Super Standart MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 Super Standart MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.28. Набор лигатурных металлических брекетов .018 Super Standart MBT, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 Super Standart MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 Super Standart MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 Super Standart MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 Super Standart MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 Super Standart MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 Super Standart MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 Super Standart MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 Super Standart MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .018 Super Standart MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .018 Super Standart MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .018 Super Standart MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 Super Standart MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .018 Super Standart MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .018 Super Standart MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .018 Super Standart MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 Super Standart MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .018 Super Standart MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .018 Super Standart MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .018 Super Standart MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .018 Super Standart MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
1.29. Набор лигатурных металлических брекетов .022 Super Mini Roth, в составе:
Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 Super Mini Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 Super Mini Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 Super Mini Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .022 Super Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 Super Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 Super Mini Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 Super Mini Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 Super Mini Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 Super Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .022 Super Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 Super Mini Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 Super Mini Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 Super Mini Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 Super Mini Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 Super Mini Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 Super Mini Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 Super Mini Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 Super Mini Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 Super Mini Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 Super Mini Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.30. Набор лигатурных металлических брекетов .018 Super Mini Roth, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 Super Mini Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 Super Mini Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 Super Mini Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 Super Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 Super Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 Super Mini Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 Super Mini Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 Super Mini Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .018 Super Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .018 Super Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .018 Super Mini Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 Super Mini Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .018 Super Mini Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .018 Super Mini Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .018 Super Mini Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 Super Mini Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .018 Super Mini Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .018 Super Mini Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .018 Super Mini Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .018 Super Mini Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.31. Набор лигатурных металлических брекетов .022 Super Mini MBT, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 Super Mini MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 Super Mini MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 Super Mini MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .022 Super Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 Super Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 Super Mini MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 Super Mini MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 Super Mini MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 Super Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .022 Super Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 Super Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 Super Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 Super Mini MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 Super Mini MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 Super Mini MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 Super Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 Super Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 Super Mini MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 Super Mini MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 Super Mini MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.32. Набор лигатурных металлических брекетов .018 Super Mini MBT, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 Super Mini MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 Super Mini MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 Super Mini MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 Super Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 Super Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 Super Mini MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 Super Mini MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 Super Mini MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .018 Super Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .018 Super Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .018 Super Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 Super Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .018 Super Mini MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .018 Super Mini MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .018 Super Mini MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 Super Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .018 Super Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .018 Super Mini MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .018 Super Mini MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .018 Super Mini MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.33. Набор лигатурных металлических брекетов .022 Accurasy Roth, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 Accurasy Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 Accurasy Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 Accurasy Roth (Торк -2°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .022 Accurasy Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 Accurasy Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 Accurasy Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 Accurasy Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 Accurasy Roth (Торк -2°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 Accurasy Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2премл.лев. в.ч с НК, 25 зуб, .022 Accuracy Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 Accuracy Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 Accuracy Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 Accuracy Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1премл.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 Accuracy Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2премл.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 Accuracy Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 Accuracy Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 Accuracy Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 Accuracy Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1 прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 Accuracy Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 Accuracy Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.34. Набор лигатурных металлических брекетов .018 Accuracy Roth, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 Accuracy Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб .018 Accuracy Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 Accurasy Roth (Торк -2°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1 прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 Accuracy Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.:

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 Accugas Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.:

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 Accuracy Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 Accuracy Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 Accuracy Roth (Торк -2° , Угол $+11^{\circ}$) - не более 10 шт. в уп.:

Брекет 1 прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб., 018 Accurasy Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч с НК. 25 зуб. .018 Accuracv Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.:

Брекет 1 резец лев. н.ч., 31 зуб. .018 Accuracy Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 Accuracy Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК. 33 зуб. .018 Accuracy Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.:

Брекеты 1 премо.лев. н.ч. с НК. 34 зуб. 018 Accuracy Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб., 018 Accuracy Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1 резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 Accuracy Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.:

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб., 018 Accuracy Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК. 43 зуб. .018 Accurasy Roth (Торк -11°. Угол +5°) - не более 10

Брекет-кльик прав. н.ч. с ПК, 45 зуб, 0,018 Accuracy Round (Торк -11, 510х15) – не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1 прем. прав. н.ч. с НК, 44 зуба, .018 Accuracy Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .018 Accugay Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.35. Набор лигатурных металлических брекетов .022 Ассигасу MBT, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб., .022 Ассигасу MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб .022 Accurasy MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 Accurasy MBT (Торк -7°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1 прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб., .022 Ассигасу MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб., 022 Ассигасу MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 Ассигасу MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зvb, .022 Assuracuy MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекеты клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб., 022 Accurasy MBT (Торк -7°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет I прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб., 022 Ассигару МВТ (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч с НК. 25 зуб., .022 Accurasy MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1 резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 Assuracay MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 Assurasy MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК. 33 зуб. .022 Assurasy MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.:

Брекет I прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб. .022 Assurasy MBT (Торк -12°, Угол +2°) - не более 10 шт. в уст.

Брекет-третий класс. И.Ч. СТРК, 34 зуб, 1022 Accuracy MB1 (10PR-12, 310M-12) – не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 Ассигасу MBT (Торк -17°, Угол +2°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 Assurance MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 Assurasy MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 Accurasy MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 Accurasy MBT (Торк -12°, Угол +2°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 Accurasy MBT (Торк -17°, Угол +2°) - не более 10 шт. в уп.

1.36. Набор лигатурных металлических брекетов .018 Accurasy MBT, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 Accurasy MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 Accurasy MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 Accurasy MBT (Торк -7°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 Accurasy MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 Accurasy MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 Accurasy MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 Accurasy MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 Accurasy MBT (Торк -7°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .018 Accurasy MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .018 Accurasy MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .018 Accurasy MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 Accurasy MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .018 Accurasy MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .018 Accurasy MBT (Торк -12°, Угол +2°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .018 Accurasy MBT (Торк -17°, Угол +2°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 Accurasy MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .018 Accurasy MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .018 Accurasy MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .018 Accurasy MBT (Торк -12°, Угол +2°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .018 Accurasy MBT (Торк -17°, Угол +2°) - не более 10 шт. в уп.

1.37. Набор лигатурных металлических брекетов .022 Accurasy Mini Roth, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 Accurasy Mini Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 Accurasy Mini Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 Accurasy Mini Roth (Торк -2°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .022 Accurasy Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 Accurasy Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 Accurasy Mini Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 Accurasy Mini Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 Accurasy Mini Roth (Торк -2°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 Accurasy Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .022 Accurasy Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 Accurasy Mini Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 Accurasy Mini Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 Accurasy Mini Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 Accurasy Mini Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 Accurasy Mini Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 Accurasy Mini Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 Accurasy Mini Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 Accurasy Mini Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 Accurasy Mini Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 Accurasy Mini Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.38. Набор лигатурных металлических брекетов .018 Accurasy Mini Roth, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 Accurasy Mini Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 Accurasy Mini Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 Accurasy Mini Roth (Торк -2°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 Accurasy Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 Accurasy Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 Accurasy Mini Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 Accurasy Mini Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 Accurasy Mini Roth (Торк -2°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .018 Accurasy Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .018 Accurasy Mini Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .018 Accurasy Mini Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 Accurasy Mini Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .018 Accurasy Mini Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .018 Accurasy Mini Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .018 Accurasy Mini Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 Accurasy Mini Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .018 Accurasy Mini Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .018 Accurasy Mini Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .018 Accurasy Mini Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .018 Accurasy Mini Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.39. Набор лигатурных металлических брекетов .022 Accurasy Mini MBT, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 Accurasy Mini MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 Accurasy Mini MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 Accurasy Mini MBT (Торк -7°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .022 Accurasy Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 Accurasy Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 Accurasy Mini MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 Accurasy Mini MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 Accurasy Mini MBT (Торк -7°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 Accurasy Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .022 Accurasy Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 Accurasy Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 Accurasy Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 Accurasy Mini MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 Accurasy Mini MBT (Торк -12°, Угол +2°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 Accurasy Mini MBT (Торк -17°, Угол +2°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 Accurasy Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 Accurasy Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 Accurasy Mini MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 Accurasy Mini MBT (Торк -12°, Угол +2°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 Accurasy Mini MBT (Торк -17°, Угол +2°) - не более 10 шт. в уп.;

1.40. Набор лигатурных металлических брекетов .018 Accurasy Mini MBT, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 Accurasy Mini MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 Accurasy Mini MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 Accurasy Mini MBT (Торк -7°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 Accurasy Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 Accurasy Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 Accurasy Mini MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 Accurasy Mini MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 Accurasy Mini MBT (Торк -7°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .018 Accurasy Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .018 Accurasy Mini MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .018 Accurasy Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 Accurasy Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .018 Accurasy Mini MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .018 Accurasy Mini MBT (Торк -12°, Угол +2°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .018 Accurasy Mini MBT (Торк -17°, Угол +2°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 Accurasy Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .018 Accurasy Mini MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .018 Accurasy Mini MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .018 Accurasy Mini MBT (Торк -12°, Угол +2°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .018 Accurasy Mini MBT (Торк -17°, Угол +2°) - не более 10 шт. в уп.

1.41. Набор лигатурных металлических брекетов .022 Super Bio Roth, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 Super Bio Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 Super Bio Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 Super Bio Roth (Торк -2°, Угол +10°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .022 Super Bio Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 Super Bio Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 Super Bio Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 Super Bio Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 Super Bio Roth (Торк -2°, Угол +10°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 Super Bio Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .022 Super Bio Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 Super Bio Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 Super Bio Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 Super Bio Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 Super Bio Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 Super Bio Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 Super Bio Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 Super Bio Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 Super Bio Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 Super Bio Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 Super Bio Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.42. Набор лигатурных металлических брекетов .018 Super Bio Roth, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 Super Bio Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 Super Bio Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 Super Bio Roth (Торк -2°, Угол +10°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 Super Bio Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 Super Bio Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 Super Bio Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 Super Bio Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 Super Bio Roth (Торк -2°, Угол +10°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .018 Super Bio Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .018 Super Bio Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .018 Super Bio Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 Super Bio Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .018 Super Bio Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .018 Super Bio Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .018 Super Bio Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 Super Bio Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .018 Super Bio Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .018 Super Bio Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .018 Super Bio Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .018 Super Bio Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.43. Набор лигатурных металлических брекетов .022 Super Bio MBT, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 Super Bio MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 Super Bio MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 Super Bio MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .022 Super Bio MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 Super Bio MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 Super Bio MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 Super Bio MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 Super Bio MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 Super Bio MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .022 Super Bio MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 Super Bio MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 Super Bio MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 Super Bio MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 Super Bio MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 Super Bio MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 Super Bio MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 Super Bio MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 Super Bio MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 Super Bio MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 Super Bio MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.44. Набор лигатурных металлических брекетов .018 Super Bio MBT, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 Super Bio MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 Super Bio MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 Super Bio MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 Super Bio MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 Super Bio MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 Super Bio MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 Super Bio MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 Super Bio MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .018 Super Bio MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .0218 Super Bio MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .018 Super Bio MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 Super Bio MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .018 Super Bio MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .018 Super Bio MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .018 Super Bio MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 Super Bio MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .018 Super Bio MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .018 Super Bio MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1 прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .018 Super Bio MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .018 Super Bio MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.45. Набор лигатурных металлических брекетов .022 Executive Roth, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 Executive Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб .022 Executive Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 Executive Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1 прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .022 Executive Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб., .022 Executive Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 Executive Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 Executive Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 Executive Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.

Брекет 1 прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 Executive Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч с НК. 25 зуб, .022 Executive Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 Executive Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 Executive Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 Executive Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1 прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 Executive Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 Executive Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 Executive Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 Executive Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 Executive Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1 прем. прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 Executive Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прям.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 Executive Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.46. Набор лигатурных металлических брекетов .018 Executive Roth, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 Executive Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт.
в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб .018 Executive Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 Executive Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1 прем. прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 Executive Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 Executive Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.:

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 Executive Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 Executive Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 Executive Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1 прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .018 Executive Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч с НК. 25 зуб, .018 Executive Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .018 Executive Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.:

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 Executive Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .018 Executive Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1 прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .018 Executive Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.:

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .018 Executive Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 Executive Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.:

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .018 Executive Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .018 Executive Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .018 Executive Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .018 Executive Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.47. Набор лигатурных металлических брекетов .022 Executive MBT, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 Executive MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 Executive MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 Executive MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .022 Executive MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 Executive MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 Executive MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 Executive MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 Executive MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 Executive MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .022 Executive MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 Executive MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 Executive MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 Executive MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 Executive MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 Executive MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 Executive MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 Executive MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 Executive MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 Executive MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 Executive MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.48. Набор лигатурных металлических брекетов .018 Executive MBT, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 Executive MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 Executive MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 Executive MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 Executive MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 Executive MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 Executive MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 Executive MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 Executive MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .018 Executive MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .018 Executive MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .018 Executive MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 Executive MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .018 Executive MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .018 Executive MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .018 Executive MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 Executive MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .018 Executive MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .018 Executive MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .018 Executive MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 РВ Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.:

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб., 022 RB Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.:

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 РВ Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб., 022 RB Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1 прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 RB Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 RB Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 RB Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 РВ Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 RB Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1 прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 РВ Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

1.50. Набор лигатурных металлических брекетов .018 PB Roth, в составе:

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб .018 РВ Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1 прем. прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 РВ Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 РВ Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 РВ Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. и

Брекет 2прем.лев. в.ч с НК. 25 зуб, .018 РВ Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 РВ Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1 прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .018 РВ Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 РВ Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .018 РВ Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .018 РВ Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 PT Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 PT Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 PT Roth (Торк 0°, Угол +7°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 PT Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1 прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 PT Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч с НК. 25 зуб, .022 PT Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 PT Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 PT Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 PT Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 PT Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 PT Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 PT Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 PT Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 PT Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 PT Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 PT Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
1.52. Набор лигатурных металлических брекетов .018 PT Roth, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 PT Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 PT Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 PT Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 PT Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 PT Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 PT Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 PT Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 PT Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .018 PT Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .018 PT Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .018 PT Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 PT Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .018 PT Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .018 PT Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .018 PT Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 PT Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .018 PT Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .018 PT Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .018 PT Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .018 PT Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.53. Набор лигатурных металлических брекетов .018 вертикальных Roth, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 вертикальный Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 вертикальный Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 вертикальный Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 вертикальный Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 вертикальный Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 вертикальный Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 вертикальный Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 вертикальный Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .018 вертикальный Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .018 вертикальный Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .018 вертикальный Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 вертикальный Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .018 вертикальный Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .018 вертикальный Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .018 вертикальный Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 вертикальный Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .018 вертикальный Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .018 вертикальный Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .018 вертикальный Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .018 вертикальный Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.54. Набор лигатурных металлических брекетов .022 вертикальных Roth, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 вертикальный Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 вертикальный Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 .022 зуб, вертикальный Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .022 вертикальный Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 вертикальный Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 вертикальный Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 вертикальный Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 вертикальный Roth (Торк 0°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 вертикальный Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .022 вертикальный Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 вертикальный Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 вертикальный Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 вертикальный Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 вертикальный Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 вертикальный Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 вертикальный Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 вертикальный Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 вертикальный Roth (Торк -11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 вертикальный Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 вертикальный Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.55. Набор лигатурных металлических брекетов .018 Ricketts, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 Ricketts (Торк +22°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 Ricketts (Торк +14°, Угол +10°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 Ricketts (Торк +7°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 Ricketts (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 Ricketts (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 Ricketts (Торк +22°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 Ricketts (Торк +14°, Угол +10°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 Ricketts (Торк +7°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .018 Ricketts (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .018 Ricketts (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .018 Ricketts (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 Alexander (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 Alexander (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 Alexander (Торк -3°, Угол +11°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 Alexander (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .022 Alexander (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 Alexander (Торк -5°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 Alexander (Торк -5°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 Alexander (Торк -7°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 Alexander (Торк -11°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 Alexander (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 Alexander (Торк -5°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 Alexander (Торк -5°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 Alexander (Торк -7°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1 прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 Alexander (Торк -11°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 Alexander (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.59. Набор лигатурных металлических брекетов .018 2D лингвальных, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.:

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.:

Брекет 1 прем. прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Бреккет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.:

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.:

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .018 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.:

Брекет 2прем.лев. в.ч с НК. 25 зуб, .018 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.:

Брекет 1 резец лев. н.ч., 31 зуб, .018 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.:

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .018 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1 прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .018 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .018 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.:

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .018 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .018 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.:

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .018 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .018 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

1.60. Набор лигатурных металлических брекетов .022 2D лингвальных, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.:

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1 прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .022 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч с НК, 25 зуб, .022 2D лингвальный - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 2D лингвальный (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

1.61. Набор лигатурных металлических брекетов .022 3D лингвальных с двойным слотом, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк -50°, Вертик.торк +50°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк -50°, Вертик.торк +50°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк -55°, Вертик.торк +55°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк -5°, Вертик.торк +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк -5°, Вертик.торк +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1моляр прав. в.ч., 16 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк -10°, Вертик.торк +10°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2моляр прав. в.ч., 17 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк -5°, Вертик.торк +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк -50°, Вертик.торк +50°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк -50°, Вертик.торк +50°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк -55°, Вертик.торк +55°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк -5°, Вертик.торк +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк -5°, Вертик.торк +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1моляр лев. в.ч., 26 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк -10°, Вертик.торк +10°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2моляр лев. в.ч., 27 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк -5°, Вертик.торк +5°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк -45°, Вертик.торк +45°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк -45°, Вертик.торк +45°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк -45°, Вертик.торк +45°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк 0°, Вертик.торк 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк 0°, Вертик.торк 0°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 1моляр лев. н.ч., 36 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк -10°, Вертик.торк +10°) - не более 10 шт. в уп.;
Брекет 2моляр лев. н.ч., 37 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк 0°, Вертик.торк 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк -45° , Вертик.торк $+45^{\circ}$) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк -45° , Вертик.торк $+45^{\circ}$) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк -45° , Вертик.торк $+45^{\circ}$) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк 0° , Вертик.торк 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк 0° , Вертик.торк 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1моляр прав. н.ч., 46 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк -10° , Вертик.торк $+10^{\circ}$) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2моляр прав. н.ч., 47 зуб, .022 3D лингвальный с двойным слотом (Горизонт.торк 0° , Вертик.торк 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.62. Набор лигатурных металлических брекетов .022 3D лингвальных с горизонтальным слотом, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -31° , Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -31° , Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -31° , Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -24° , Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -24° , Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1моляр прав. в.ч., 16 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -9° , Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2моляр прав. в.ч., 17 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -9° , Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -31° , Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -31° , Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -31° , Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -24° , Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -24° , Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1моляр лев. в.ч., 26 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -9° , Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2моляр лев. в.ч., 27 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -9° , Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -40° , Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -40° , Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -40° , Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -24° , Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -24° , Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1моляр лев. н.ч., 36 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк 0° , Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2моляр лев. н.ч., 37 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -40°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -40°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -40°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -24°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк -24°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1моляр прав. н.ч., 46 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2моляр прав. н.ч., 47 зуб, .022 3D лингвальный с горизонтальным слотом (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

1.63. Набор лигатурных металлических брекетов .022 3D лингвальных с вертикальным слотом, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк +32°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк +38°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк +42°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1моляр прав. в.ч., 16 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк -10°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2моляр прав. в.ч., 17 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк -5°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк +32°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк +38°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк +42°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1моляр лев. в.ч., 26 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк -10°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2моляр лев. в.ч., 27 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк -5°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк +48°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк +48°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк +52°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1моляр лев. н.ч., 36 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк +10°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2моляр лев. н.ч., 37 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк +48°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 3D лингвальный с вертикальным слотом (Торк +48°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 3D вертикальным с горизонтальным слотом (Торк +52°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 3D вертикальным с горизонтальным слотом (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 3D вертикальным с горизонтальным слотом (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1моляр прав. н.ч., 46 зуб, .022 3D вертикальным с горизонтальным слотом (Торк +10°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2моляр прав. н.ч., 47 зуб, .022 3D вертикальным с горизонтальным слотом (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

1.64. Набор лигатурных керамических брекетов .018 Maia MBT, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 Maia MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 Maia MBT (Торк +10°, Ang. +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 Maia MBT (Торк -7°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 Maia MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 Maia MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 Maia MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 Maia MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 Maia MBT (Торк -7°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .018 Maia MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .018 Maia MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .018 Maia MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 Maia MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .018 Maia MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .018 Maia MBT (Торк -12°, Угол +2°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .018 Maia MBT (Торк -17°, Угол +2°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 Maia MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .018 Maia MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .018 Maia MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .018 Maia MBT (Торк -12°, Угол +2°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .018 Maia MBT (Торк -17°, Угол +2°) - не более 10 шт. в уп.;

1.65. Набор лигатурных керамических брекетов .022 Maia Roth, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 Maia Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 Maia Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 Maia Roth (Торк -2°, Угол +10°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .022 Maia Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 Maia Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 Maia Roth (Торк +12°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 Maia Roth (Торк +8°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 Maia Roth (Торк -2°, Угол +10°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 Maia Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .022 Maia Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 Maia Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 Maia Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 Maia Roth (Торк -11°, Угол +7°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 Maia Roth (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 Maia Roth (Торк -22°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 Maia Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 Maia Roth (Торк -1°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч с НК. 25 зуб, .022 Maia 2nd Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 Maia 2nd MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 Maia 2nd MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.71. Набор лигатурных керамических брекетов .018 Maia 2nd MBT, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 Maia 2nd MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 Maia 2nd MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 Maia 2nd MBT (Торк -7°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 Maia 2nd MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 Maia 32nd MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 Maia 2nd MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 Maia 2nd MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 Maia 2nd MBT (Торк -7°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .018 Maia 2nd MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .018 Maia 2nd MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .018 Maia 2nd MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 Maia 2nd MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .018 Maia 2nd MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .018 Maia 2nd MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .018 Maia 2nd MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 Maia 2nd MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .018 Maia 2nd MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .018 Maia 2nd MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .018 Maia 2nd MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .018 Maia 2nd MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

1.72. Набор лигатурных сапфировых брекетов .022 Sapphire Plus Roth, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 Sapphire Plus Roth (Торк +11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 Sapphire Plus Roth (Торк +10°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 Sapphire Plus Roth (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .022 Sapphire Plus Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 Sapphire Plus Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 Sapphire Plus Roth (Торк +11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 Sapphire Plus Roth (Торк +10°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 Sapphire Plus Roth (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 Sapphire Plus Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .022 Sapphire Plus Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 Sapphire Plus Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 Sapphire Plus Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 Sapphire Plus Roth (Торк -11°, Угол +7°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 Sapphire Plus Roth (Торк -17°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 Sapphire Plus Roth (Торк -22°, Угол +6°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 Sapphire Plus Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 Sapphire Plus Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 Sapphire Plus Roth (Торк -11°, Угол +7°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 Sapphire Plus Roth (Торк -17°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 Sapphire Plus Roth (Торк -22°, Угол +6°) - не более 10 шт. в уп.

1.73. Набор лигатурных сапфировых брекетов .018 Sapphire Plus Roth, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 Sapphire Plus Roth (Торк +11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 Sapphire Plus Roth (Торк +10°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 Sapphire Plus Roth (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 Sapphire Plus Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 Sapphire Plus Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 Sapphire Plus Roth Roth (Торк +11°, Угол +5°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 Sapphire Plus Roth (Торк +10°, Угол +9°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 Sapphire Plus Roth (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .018 Sapphire Plus Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч. с НК, 25 зуб, .018 Sapphire Plus Roth (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .018 Sapphire Plus Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 Sapphire Plus Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .018 Sapphire Plus Roth (Торк -11°, Угол +7°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .018 Sapphire Plus Roth (Торк -17°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .018 Sapphire Plus Roth (Торк -22°, Угол +6°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 Sapphire Plus Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .018 Sapphire Plus Roth (Торк 0°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .018 Sapphire Plus Roth (Торк -11°, Угол +7°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .018 Sapphire Plus Roth (Торк -17°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .018 Sapphire Plus Roth (Торк -22°, Угол +6°) - не более 10 шт. в уп.

1.74. Набор лигатурных сапфировых брекетов .022 Sapphire Plus MBT, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .022 Sapphire Plus MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .022 Sapphire Plus MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .022 Sapphire Plus MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .022 Sapphire Plus MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .022 Sapphire Plus MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .022 Sapphire Plus Roth MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .022 Sapphire Plus MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .022 Sapphire Plus MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .022 Sapphire Plus MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч с НК, 25 зуб, .022 Sapphire Plus MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .022 Sapphire Plus MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .022 Sapphire Plus MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .022 Sapphire Plus MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .022 Sapphire Plus MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .022 Sapphire Plus MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .022 Sapphire Plus MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .022 Sapphire Plus MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .022 Sapphire Plus MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .022 Sapphire Plus MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .022 Sapphire Plus MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

1.75. Набор лигатурных сапфировых брекетов .018 Sapphire Plus MBT, в составе:

Брекет центр.прав. в.ч., 11 зуб, .018 Sapphire Plus MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.прав. в.ч., 12 зуб, .018 Sapphire Plus MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. в.ч. с НК, 13 зуб, .018 Sapphire Plus MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. в.ч. с НК, 14 зуб, .018 Sapphire Plus MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. в.ч. с НК, 15 зуб, .018 Sapphire Plus MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет центр.лев. в.ч., 21 зуб, .018 Sapphire Plus Roth MBT (Торк +17°, Угол +4°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет латер.лев. в.ч., 22 зуб, .018 Sapphire Plus MBT (Торк +10°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. в.ч. с НК, 23 зуб, .018 Sapphire Plus MBT (Торк 0°, Угол +8°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. в.ч. с НК, 24 зуб, .018 Sapphire Plus MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. в.ч с НК, 25 зуб, .018 Sapphire Plus MBT (Торк -7°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец лев. н.ч., 31 зуб, .018 Sapphire Plus MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец лев. н.ч., 32 зуб, .018 Sapphire Plus MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык лев. н.ч. с НК, 33 зуб, .018 Sapphire Plus MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.лев. н.ч. с НК, 34 зуб, .018 Sapphire Plus MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.лев. н.ч. с НК, 35 зуб, .018 Sapphire Plus MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1резец прав. н.ч., 41 зуб, .018 Sapphire Plus MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2резец прав. н.ч., 42 зуб, .018 Sapphire Plus MBT (Торк -6°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет клык прав. н.ч. с НК, 43 зуб, .018 Sapphire Plus MBT (Торк -6°, Угол +3°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 1прем.прав. н.ч. с НК, 44 зуб, .018 Sapphire Plus MBT (Торк -12°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.;

Брекет 2прем.прав. н.ч. с НК, 45 зуб, .018 Sapphire Plus MBT (Торк -17°, Угол 0°) - не более 10 шт. в уп.

II. Принадлежности:

1. Дуги ортодонтические, варианты исполнения:

- Дуга нитиноловая термоактивная универсальная со стопорами Copper NiTi .013 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая термоактивная универсальная со стопорами Copper NiTi .014 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая термоактивная универсальная со стопорами Copper NiTi .016 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая термоактивная универсальная со стопорами Copper NiTi .018 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая термоактивная универсальная со стопорами Copper NiTi .020 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая термоактивная универсальная со стопорами Copper NiTi .014x.025 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая термоактивная универсальная со стопорами Copper NiTi .016x.025 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая термоактивная универсальная со стопорами Copper NiTi .018x.025 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Oval Lower .012 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Oval Upper .012 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Oval Lower .014 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Oval Upper .014 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Oval Lower .016 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Oval Upper .016 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Oval Lower .018 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Oval Upper .018 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Oval Lower .020 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая суперэластичная круглая NiTi SE Oval Upper .020 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Lower .014x.025 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Upper .014x.025 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Lower .016x.016 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Upper .016x.016 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Lower .016x.022 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Upper .016x.022 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Lower .017x.022 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Upper .017x.022 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга нитиноловая суперэластичная прямоугольная NiTi SE Oval Lower .018x.022 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- Дуга прямоугольная TMA Universal Lower .018X.025 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга прямоугольная TMA Universal Upper .018X.025 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга прямоугольная TMA Universal Lower .019X.025 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга прямоугольная TMA Universal Upper .019X.025 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга прямоугольная TMA Universal Lower .021X.025 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.;
- Дуга прямоугольная TMA Universal Upper .021X.025 - 1 шт. в уп. – не более 100 шт.

2. Трубки щечные, варианты исполнения:

- Трубка щечная на 1-й моляр самолигирующая Roth, UR, 16 зуб .022 (Торк -9°, Угол 7°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр самолигирующая Roth, UL, 26 зуб .022 (Торк -9°, Угол 7°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр самолигирующая Roth, LL, 36 зуб .022 (Торк -30°, Угол 7°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр самолигирующая Roth, LR, 46 зуб .022 (Торк -30°, Угол 7°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр самолигирующая MBT, UR, 16 зуб .022 (Торк -14°, Угол 10°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр самолигирующая MBT, UL, 26 зуб .022 (Торк -14°, Угол 10°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр самолигирующая MBT, LL, 36 зуб .022 (Торк -20°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр самолигирующая MBT, LR, 46 зуб .022 (Торк -20°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр конвертируемая Liberty Plus MBT, UR, 16 зуб .022 (Торк -10°, Угол 7°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр конвертируемая Liberty Plus MBT, UL, 26 зуб .022 (Торк -10°, Угол 7°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр конвертируемая Liberty Plus MBT, LL, 36 зуб .022 (Торк -10°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр конвертируемая Liberty Plus MBT, LR, 46 зуб .022 (Торк -10°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр конвертируемая Liberty Plus Roth, UR, 16 зуб .022 (Торк -10°, Угол 7°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр конвертируемая Liberty Plus Roth, UL, 26 зуб .022 (Торк -10°, Угол 7°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр конвертируемая Liberty Plus Roth, LL, 36 зуб .022 (Торк -25°, Угол 4°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр конвертируемая Liberty Plus Roth, LR, 46 зуб .022 (Торк -25°, Угол 4°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 2-й моляр неконвертируемая Liberty Plus MBT, UR, 17 зуб .022 (Торк -14°, Угол 14°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 2-й моляр неконвертируемая Liberty Plus MBT, UL, 27 зуб .022 (Торк -14°, Угол 14°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 2-й моляр неконвертируемая Liberty Plus MBT, LL, 37 зуб .022 (Торк -10°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 2-й моляр неконвертируемая Liberty Plus MBT, LR, 47 зуб .022 (Торк -10°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 2-й моляр неконвертируемая Liberty Plus Roth, UR, 17 зуб .022 (Торк -14°, Угол 14°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 2-й моляр неконвертируемая Liberty Plus Roth, UL, 27 зуб .022 (Торк -14°, Угол 14°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 2-й моляр неконвертируемая Liberty Plus Roth, LL, 37 зуб .022 (Торк -30°, Угол 6°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 2-й моляр неконвертируемая Liberty Plus Roth, LR, 47 зуб .022 (Торк -30°, Угол 6°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр неконвертируемая Liberty MBT, UR, 16 зуб .022 (Торк -14°, Угол 10°) - не более 100 шт. в уп.;

- [illegible]

- [illegible]

- Трубка щечная на 2-й моляр неконвертируемая Edgewise Mini, UL, 27 зуб .022 (Торк 0°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 2-й моляр неконвертируемая Edgewise Mini, LL, 37 зуб .022 (Торк 0°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 2-й моляр неконвертируемая Edgewise Mini, LR, 47 зуб .022 (Торк 0°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр неконвертируемая MBT, UR, 16 зуб .018 (Торк -14°, Угол 10°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр неконвертируемая MBT, UL, 26 зуб .018 (Торк -14°, Угол 10°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр неконвертируемая MBT, LL, 36 зуб .018 (Торк -20°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр неконвертируемая MBT, LR, 46 зуб .018 (Торк -20°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр неконвертируемая Roth, UR, 16 зуб .018 (Торк -9°, Угол 7°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр неконвертируемая Roth, UL, 26 зуб .018 (Торк -9°, Угол 7°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр неконвертируемая Roth, LL, 36 зуб .018 (Торк -30°, Угол 7°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр неконвертируемая Roth, LR, 46 зуб .018 (Торк -30°, Угол 7°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр неконвертируемая Edgewise, UR, 16 зуб .018 (Торк 0°, Угол 6°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр неконвертируемая Edgewise, UL, 26 зуб .018 (Торк 0°, Угол 6°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр неконвертируемая Edgewise, LL, 36 зуб .018 (Торк 0°, Угол 6°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная на 1-й моляр неконвертируемая Edgewise, LR, 46 зуб .018 (Торк 0°, Угол 6°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная неконвертируемая Cuspid MBT, UR4, 14 зуб .018 (Торк -7°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная неконвертируемая Cuspid MBT, UR5, 15 зуб .018 (Торк -7°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная неконвертируемая Cuspid MBT, UL4, 24 зуб .018 (Торк -7°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная неконвертируемая Cuspid MBT, UL5, 25 зуб .018 (Торк -7°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная неконвертируемая Cuspid MBT, LL4, 34 зуб .018 (Торк -14°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная неконвертируемая Cuspid MBT, LL5, 35 зуб .018 (Торк -14°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная неконвертируемая Cuspid MBT, LR4, 44 зуб .018 (Торк -14°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная неконвертируемая Cuspid MBT, LR5, 45 зуб .018 (Торк -14°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная неконвертируемая Cuspid Roth, UR4, 14 зуб .018 (Торк -7°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная неконвертируемая Cuspid Roth, UR5, 15 зуб .018 (Торк -7°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная неконвертируемая Cuspid Roth, UL4, 24 зуб .018 (Торк -7°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная неконвертируемая Cuspid Roth, UL5, 25 зуб .018 (Торк -7°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;
- Трубка щечная неконвертируемая Cuspid Roth, LL4, 34 зуб .018 (Торк -4°, Угол 0°) - не более 100 шт. в уп.;

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

6. Тяга эластичная, варианты исполнения:

- [illegible]

- Тяга эластичная без латекса Белка, 127,6г, 3,2 мм - 100 шт. в уп. - не более 50 упаковок;
- Тяга эластичная без латекса Кролик, 127,6г, 4,7 мм - 100 шт. в уп. - не более 50 упаковок;
- Тяга эластичная без латекса Лиса, 127,6г, 6,4 мм - 100 шт. в уп. - не более 50 упаковок;
- Тяга эластичная без латекса Пингвин, 127,6г, 7,9 мм - 100 шт. в уп. - не более 50 упаковок;
- Тяга эластичная без латекса Обезьяна, 127,6г, 9,5 мм - 100 шт. в уп. - не более 50 упаковок;
- Тяга эластичная без латекса Белка, 184,3г, 3,2 мм - 100 шт. в уп. - не более 50 упаковок;
- Тяга эластичная без латекса Кролик, 184,3г, 4,7 мм - 100 шт. в уп. - не более 50 упаковок;
- Тяга эластичная без латекса Лиса, 184,3г, 6,4 мм - 100 шт. в уп. - не более 50 упаковок;
- Тяга эластичная без латекса Пингвин, 184,3г, 7,9 мм - 100 шт. в уп. - не более 50 упаковок;
- Тяга эластичная без латекса Обезьяна, 184,3г, 9,5 мм - 100 шт. в уп. - не более 50 упаковок.

7. Кнопки лингвальные, варианты исполнения:

- Кнопка лингвальная круглая - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Кнопка лингвальная овальная - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Кнопка лингвальная прямоугольная - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Кнопка лингвальная с отверстиями - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Кнопка лингвальная круглая для припайки - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Кнопка лингвальная овальная для припайки - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Кнопка лингвальная прямоугольная для припайки - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Кнопка лингвальная круглая с двумя крыльями - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Кнопка лингвальная овальная с двумя крыльями - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Кнопка лингвальная прямоугольная с двумя крыльями - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Кнопка лингвальная на цепочке круглая, серебристая - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Кнопка лингвальная на цепочке круглая, золотистая - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Кнопка лингвальная на цепочке прямоугольная, серебристая - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Кнопка лингвальная на цепочке прямоугольная, золотистая - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Кнопка лингвальная с шипом - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок.

8. Пружины, варианты исполнения:

- Пружина на сжатие NiTi Open 0.010X180 мм - 2 шт. в уп. - не более 100 упаковок;
- Пружина на сжатие NiTi Open 0.012X180 мм - 2 шт. в уп. - не более 100 упаковок;
- Пружина с маленькими петлями NiTi Close 0.008x6 мм - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Пружина с маленькими петлями NiTi Close 0.008x9 мм - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Пружина с маленькими петлями NiTi Close 0.008x12 мм - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Пружина с маленькими петлями NiTi Close 0.010x6 мм - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Пружина с маленькими петлями NiTi Close 0.010x9 мм - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Пружина с маленькими петлями NiTi Close 0.010x12 мм - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Пружина с маленькими петлями NiTi Close 0.012x6 мм - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Пружина с маленькими петлями NiTi Close 0.012x9 мм - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Пружина с маленькими петлями NiTi Close 0.012x12 мм - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Пружина с большими петлями NiTi Close 0.008x6 мм - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Пружина с большими петлями NiTi Close 0.008x9 мм - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Пружина с большими петлями NiTi Close 0.008x12 мм - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Пружина с большими петлями NiTi Close 0.010x6 мм - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Пружина с большими петлями NiTi Close 0.010x8 мм - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Пружина с большими петлями NiTi Close 0.010x12 мм - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Пружина торковая NiTi 0.16x0.22 мм - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Пружина торковая NiTi 0.18x0.25 мм - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок.

9. Кольца бандажные, варианты исполнения:

- Кольцо бандажное на 1-й моляр 16UR, размер с 30 по 44+ - 5 шт. в уп. - не более 10 упаковок;
- Кольцо бандажное на 1-й моляр 26UL, размер с 30 по 44+ - 5 шт. в уп. - не более 10 упаковок;
- Кольцо бандажное на 1-й моляр 36LL, размер с 30 по 44+ - 5 шт. в уп. - не более 10 упаковок;
- Кольцо бандажное на 1-й моляр 46LR, размер с 30 по 44+ - 5 шт. в уп. - не более 10 упаковок;

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- Кольцо бандажное с тройной конвертируемой щечной трубкой Roth .022 и лингвальным замком на 1-й моляр 16UR, размер с 31 по 44+ - 5 шт. в уп. – не более 10 упаковок;
- Кольцо бандажное с тройной конвертируемой щечной трубкой Roth .022 и лингвальным замком на 1-й моляр 26UL, размер с 31 по 44+ - 5 шт. в уп. – не более 10 упаковок;
- Кольцо бандажное с тройной конвертируемой щечной трубкой Roth .022 и лингвальным замком на 1-й моляр 36LL, размер с 31 по 44+ - 5 шт. в уп. – не более 10 упаковок;
- Кольцо бандажное с тройной конвертируемой щечной трубкой Roth .022 и лингвальным замком на 1-й моляр 46LR, размер с 31 по 44+ - 5 шт. в уп. – не более 10 упаковок.

10. Крючок силовой, варианты исполнения:

- Крючок силовой длинный левосторонний (L), 11,5мм - 10 шт. в уп. – не более 20 упаковок;
- Крючок силовой длинный правосторонний (R), 11,5мм - 10 шт. в уп. – не более 20 упаковок;
- Крючок силовой средней длины левосторонний (L), 8,7мм - 10 шт. в уп. – не более 20 упаковок;
- Крючок силовой средней длины правосторонний (R), 8,7мм - 10 шт. в уп. – не более 20 упаковок;
- Крючок силовой короткий левосторонний (L), 7,3мм - 10 шт. в уп. – не более 20 упаковок;
- Крючок силовой короткий правосторонний (R), 7,3мм - 10 шт. в уп. – не более 20 упаковок;
- Крючок силовой двойной левосторонний (L), 10мм - 10 шт. в уп. – не более 20 упаковок;
- Крючок силовой двойной правосторонний (R), 10мм - 10 шт. в уп. – не более 20 упаковок;
- Крючок силовой тройной левосторонний (L), 13мм - 10 шт. в уп. – не более 20 упаковок;
- Крючок силовой тройной правосторонний (R), 13мм - 10 шт. в уп. – не более 20 упаковок.

11. Стопор - 10 шт. в уп. – не более 20 упаковок.

12. Крючок обжимной, варианты исполнения:

- Крючок обжимной длинный, 5,2 мм - 10 шт. в уп. не более 20 упаковок;
- Крючок обжимной средней длины, 4,7 мм - 10 шт. в уп. – не более 20 упаковок;
- Крючок обжимной короткий, 4,1 мм - 10 шт. в уп. – не более 20 упаковок.

13. Замок лингвальный, варианты исполнения:

- Замок лингвальный без крючка - 10 шт. в уп. - не более 20 упаковок;
- Замок лингвальный с крючком левосторонний (L) - 10 шт. в уп. – не более 20 упаковок;
- Замок лингвальный с крючком правосторонний (R) - 10 шт. в уп. – не более 20 упаковок.

14. Лигатура металлическая, варианты исполнения:

- Лигатура металлическая на катушке SS 0.20 мм, 30 г - 1 шт. в уп. – не более 10 упаковок;
- Лигатура металлическая на катушке SS 0.25 мм, 30 г - 1 шт. в уп. – не более 10 упаковок;
- Лигатура металлическая на катушке SS 0.30 мм, 30 г - 1 шт. в уп. – не более 10 упаковок.

15. Брекет накусочный - 10 шт. в уп. – не более 20 упаковок.

16. Крючок для установки в самолигирующий металлический брекет PT-5 - 100 шт. в уп. - не более 20 упаковок.

17. Ретейнер, варианты исполнения:

- Ретейнер на верхнюю челюсть, размеры: 22#/24#/26#/28#/30# Upper - 2 шт. в уп. – не более 10 упаковок;
- Ретейнер на нижнюю челюсть, размеры: 27#/29#/31#/33#/35# Lower - 2 шт. в уп. – не более 10 упаковок.

18. Маска лицевая - 1 шт. в уп. – не более 10 упаковок.

5. Общие показания, противопоказания и побочные эффекты:

Показания:

Система ортодонтическая регулируемая предназначена для ортодонтического смещения натуральных зубов. Необходимо следовать руководствам ортодонта.

Противопоказания:

Нельзя устанавливать пациентам с гипогенной тканью зуба. Запрещено использование лицами, страдающими аллергией на нержавеющую сталь.

Метод хранения и управления после использования:

Необходимо утилизировать после использования (только одноразовое использование). Необходимо утилизировать отдельные продукты во время ортодонтической терапии.

Меры предосторожности:

Будьте осторожны при отсоединении продукта под воздействием. Необходимо сменить и утилизировать отсоединяемые продукты. Не используйте повторно «ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ». Проинструктируйте пациента, чтобы он избегал жевания твердой или вязкой пищи, такой как лед, конфеты и т.д. Держите зубы в чистоте для предотвращения попадания инородных материалов. Необходимо следовать руководствам ортодонта при использовании других дополнительных частей. Не используйте после истечения срока годности. Перед применением продукт необходимо дезинфицировать.

Потенциальные осложнения:

После установки систем наступает адаптационный период, который для каждого человека длится индивидуальное время. Неприятным признаком после установки конструкций являются дефекты в речи. Побочным эффектом ношения систем является то, что выступающие элементы конструкций натирают слизистую оболочку полости рта. В случае раздражения или повреждения слизистой оболочки следует немедленно обратиться к врачу.

Порядок использования медицинского изделия: «Системы ортодонтической регулируемой»:

1. Перед применением медицинское изделие необходимо проверить. Оно должно быть гладким, без острых краев и трещин. Пользователь должен контролировать динамическое воздействие во время применения.
2. Выберите подходящий размер и вид медицинского изделия в соответствии с конкретными ортодонтическими показаниями.
3. Перед использованием продезинфицируйте медицинское изделие, погрузив его в 75-процентный раствор этилового спирта на 20~30 минут, затем промыть более 3 раз.

Наборы брекетов

1. Выберите подходящий размер брекетов в соответствии с ортодонтическими показаниями.
2. Необходимо продезинфицировать брекеты перед использованием, погрузив брекеты в 75-процентный раствор этилового спирта на 20~30 минут, затем промыть более 3 раз.
3. Очистка поверхности зубов.
4. С помощью позиционера для керамических или металлических брекетов наметьте нулевую линию.
5. Подготовьте связующее вещество в соответствии с указаниями. Сначала нанесите немного клея на поверхность очищенных зубов и распределите его тонким слоем с помощью пульверизатора. Затем нанесите небольшое количество связующего вещества на базовую пластину брекета, установите брекеты в нужное место и прижмите. В завершение удалите излишки адгезива вокруг брекета, чтобы поверхность зуба осталась ровной.
6. Закрепите брекеты посредством световой полимеризации после его установки в нужную позицию.

Трубки щечные

1. Выберите подходящий размер трубки щечной в соответствии с ортодонтическими показаниями.
2. Необходимо продезинфицировать медицинское изделие перед использованием, погрузив трубку в 75-процентный раствор этилового спирта на 20~30 минут, затем промыть более 3 раз.

3. Очистка поверхности зубов.
4. Подготовьте связующее вещество в соответствии с указаниями. Сначала нанесите немного клея на поверхность очищенных зубов и распределите его тонким слоем с помощью пульверизатора. Затем нанесите небольшое количество связующего вещества на базовую пластину трубки, установите трубку в нужное место и прижмите. В завершение удалите излишки адгезива вокруг трубки, чтобы поверхность зуба осталась ровной.
5. Закрепите трубку щечную посредством световой полимеризации после её установки в нужную позицию.
6. При контакте трубки щечной с сертифицированным эмалевым адгезивом сила удержания должна составлять не менее 25 Н.

Кольца бандажные

1. Выберите подходящий размер брекета в соответствии с ортодонтическими показаниями.
2. Необходимо продезинфицировать кольца перед использованием, погрузив кольца в 75-процентный раствор этилового спирта на 20~30 минут, затем промыть более 3 раз.
3. Очистка поверхности зубов.
4. Установите кольца в оптимальное местоположение.

6. Маркировка и упаковка:

Маркировка медицинского изделия содержит следующую информацию:

	Символ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ»	
	Символ «Внимание, обратитесь к сопроводительным документам»	
	Нестерильно	
	Маркировка сталей и сплавов	
	Символ «не использовать повторно», «одноразового использования», «использовать только один раз»	
	Символ «номера по каталогу» это «идентификационный номер», «номер повторного заказа»	
	Символ «КОД ПАРТИИ»	
	Символ «ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ»	
	Символ «Использовать до»	
	Не использовать при поврежденной упаковке	
ЕС	REP	Символ «УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕВРОПЕЙСКОМ СООБЩЕСТВЕ»

Макеты маркировок

Макет маркировки на полный ассортимент регистрируемого медицинского изделия «Наборы брекетов»:



Наименование медицинского изделия:

PY №

REF XX-XX-XXXX
LOT XX-XX-XXXX

XX-XX-XXXX XX-XX-XXXX

Zhejiang Protect Medical Equipment Co., Ltd. (Hefei) China Science & Technology Zone, Xiaofeng Town 311301, Anji City, Zhejiang China
MD Europe GmbH Langenhagen
Str. 710-0085 Langenhagen Werner Sander
Zhejiang China






0197

Contains nickel and chromium.
Shouldn't use on patients who are known allergic to these elements.

Made in China

Металлические



Наименование медицинского изделия:

PY №

REF XX-XX-XXXX
LOT XX-XX-XXXX

XX-XX-XXXX XX-XX-XXXX

Zhejiang Protect Medical Equipment Co., Ltd. (Hefei) China Science & Technology Zone, Xiaofeng Town 311301, Anji City, Zhejiang China
MD Europe GmbH Langenhagen
Str. 710-0085 Langenhagen Werner Sander
Zhejiang China






0197

Shouldn't use on patients who are known allergic to these elements.

Made in China

Керамические и сапфировые

Макет маркировки на полный ассортимент регистрируемого медицинского изделия «Дуги ортодонтические, варианты исполнения»:



Наименование медицинского изделия:

PY №

REF XX-XX-XXXX
LOT XX-XX-XXXX

XX-XX-XXXX XX-XX-XXXX

Zhejiang Protect Medical Equipment Co., Ltd. (Hefei) China Science & Technology Zone, Xiaofeng Town 311301, Anji City, Zhejiang China
MD Europe GmbH Langenhagen
Str. 710-0085 Langenhagen Werner Sander
Zhejiang China






0197

Shouldn't use on patients who are known allergic to these elements.

Made in China

Макет маркировки на полный ассортимент регистрируемого медицинского изделия «Трубки
щечные, варианты исполнения»:

PD[®] PROTECT


Наименование медицинского изделия:

ПУ №

REF XX-XX-XXXX **LOT** XX-XX-XXXX

 XX-XX-XXXX  XX-XX-XXXX

 Zhejiang Protect Medical Equipment Co., Ltd. («Чжэцзин Протект Медикал Эквипмент Ко. Лтд»), Kuitai Science & Technology Zone, Xiaofeng Town 313301, Anji City, Zhejiang, China  MD Europa GmbH Langenhagener Str.71D-50855 Langenhagen Wiener Sander

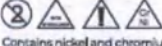 Contains nickel and chromium. Shouldn't use on patients who are known allergic to these elements.  **CE** 0197  **FDA**  **ISO13485**  **MD** MEDICAL DEVICE

Made in China

Макет маркировки на полный ассортимент регистрируемого медицинского изделия «Лигатура
эластичная, варианты исполнения»:

PD[®] PROTECT

Наименование медицинского изделия:

ПУ №

REF XX-XX-XXXX **LOT** XX-XX-XXXX

 XX-XX-XXXX  XX-XX-XXXX

 Zhejiang Protect Medical Equipment Co., Ltd. («Чжэцзин Протект Медикал Эквипмент Ко. Лтд»), Kuitai Science & Technology Zone, Xiaofeng Town 313301, Anji City, Zhejiang, China  MD Europa GmbH Langenhagener Str.71D-50855 Langenhagen Wiener Sander

 Shouldn't use on patients who are known allergic to these elements.  **CE** 0197  **FDA**  **ISO13485**  **MD** MEDICAL DEVICE

Made in China

Макет маркировки на полный ассортимент регистрируемого медицинского изделия
«Сепарационные кольца на модуле»:



Макет маркировки на полный ассортимент регистрируемого медицинского изделия «Цепочки эластичные, варианты исполнения»:



Макет маркировки на полный ассортимент регистрируемого медицинского изделия «Тяга эластичная, варианты исполнения»:

The label features a green header with the 'PD PROTECT' logo. Below it, the title 'Наименование медицинского изделия:' is followed by a field for 'РУ №'. Identification fields include 'REF' and 'LOT' (both 'XX-XX-XXXX'), a barcode, and a QR code (both 'XX-XX-XXXX'). Manufacturer information for Zhejiang Protect Medical Equipment Co., Ltd. and its European representative, MD Europe GmbH, are listed. The label includes a warning symbol, CE, FDA, and MD (Medical Device) marks, and a 'Made in China' footer.

Макет маркировки на полный ассортимент регистрируемого медицинского изделия «Кнопки лингвальные, варианты исполнения»:

The label features a green header with the 'PD PROTECT' logo. Below it, the title 'Наименование медицинского изделия:' is followed by a field for 'РУ №'. Identification fields include 'REF' and 'LOT' (both 'XX-XX-XXXX'), a barcode, and a QR code (both 'XX-XX-XXXX'). Manufacturer information for Zhejiang Protect Medical Equipment Co., Ltd. and its European representative, MD Europe GmbH, are listed. The label includes a warning symbol, CE 0197, FDA, ISO13485, and MD (Medical Device) marks, and a 'Made in China' footer.

Макет маркировки на полный ассортимент регистрируемого медицинского изделия «Пружины, варианты исполнения»:



Наименование медицинского изделия:

РУ №


REF XX-XX-XXXX

LOT XX-XX-XXXX

 XX-XX-XXXX  XX-XX-XXXX

 Zhejiang Protect Medical Equipment Co., Ltd. (浙江普瑞特医疗器械有限公司)
Protect Medical Equipment Co., Ltd. (普瑞特医疗器械有限公司)
Technology Zone, Xiaofeng Town 311301, Anji City, Zhejiang, China


 M01 Europa GmbH Langenhagener
Str. 712-9085 Langenhagen Wernigerode, Sander
Zhejiang, China

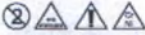
Contains nickel and chromium.
Shouldn't use on patients who are known allergic to these elements.

 0197  ISO13485 
MEDICAL DEVICE

Made in China

Макет маркировки на полный ассортимент регистрируемого медицинского изделия «Кольца бандажные, варианты исполнения»:

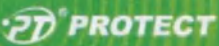

Наименование медицинского изделия:

РУ №

REF XX-XX-XXXX

LOT XX-XX-XXXX

 XX-XX-XXXX  XX-XX-XXXX

 Zhejiang Protect Medical Equipment Co., Ltd. (浙江普瑞特医疗器械有限公司)
Protect Medical Equipment Co., Ltd. (普瑞特医疗器械有限公司)
Technology Zone, Xiaofeng Town 311301, Anji City, Zhejiang, China

 M01 Europa GmbH Langenhagener
Str. 712-9085 Langenhagen Wernigerode, Sander
Zhejiang, China


Contains nickel and chromium.
Shouldn't use on patients who are known allergic to these elements.

 0197  ISO13485 
MEDICAL DEVICE

Made in China

Макет маркировки на полный ассортимент регистрируемого медицинского изделия «Крючок силовой, варианты исполнения»:



Наименование медицинского изделия:

РУ №

REF XX-XX-XXXX

LOT XX-XX-XXXX

 XX-XX-XXXX

 XX-XX-XXXX


 Zhejiang Protect Medical Equipment Co., Ltd. (宁保医疗)
Pioneer Medical Equipment Co., Ltd. (先锋医疗)
Technology Zone, Xiaofeng Town 311301, Anji City, Zhejiang, China

 CE

 FDA

 ISO13485

 MD

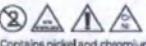
Contains nickel and chromium.
Shouldn't use on patients who are known allergic to these elements.

 CE

 FDA

 ISO13485

 MD

Made in China

Макет маркировки на полный ассортимент регистрируемого медицинского изделия «Стопор»:



Наименование медицинского изделия:

РУ №

REF XX-XX-XXXX

LOT XX-XX-XXXX

 XX-XX-XXXX

 XX-XX-XXXX

 Zhejiang Protect Medical Equipment Co., Ltd. (宁保医疗)
Pioneer Medical Equipment Co., Ltd. (先锋医疗)
Technology Zone, Xiaofeng Town 311301, Anji City, Zhejiang, China

 CE

 FDA

 ISO13485

 MD


Contains nickel and chromium.
Shouldn't use on patients who are known allergic to these elements.

 CE

 FDA

 ISO13485

 MD

Made in China

Макет маркировки на полный ассортимент регистрируемого медицинского изделия «Крючок обжимной, варианты исполнения»:

PD[®] PROTECT

Наименование медицинского изделия:

РУ №


REF XX-XX-XXXX

LOT XX-XX-XXXX

 XX-XX-XXXX  XX-XX-XXXX

 Zhejiang Protect Medical Equipment Co., Ltd. (Hefei) Pioneer Medical Equipment Co., Ltd. Science & Technology Zone, Xiaofeng Town 313301, Anji City, Zhejiang China

 MD Europe GmbH Langenhagener Str. 712-90855 Langenhagen Wiener Sander 712-90855 Langenhagen Wiener Sander

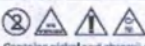 Contains nickel and chromium. Shouldn't use on patients who are known allergic to these elements.

Made in China

Макет маркировки на полный ассортимент регистрируемого медицинского изделия «Замок лигнвальный, варианты исполнения»:

PD[®] PROTECT

Наименование медицинского изделия:

РУ №


REF XX-XX-XXXX

LOT XX-XX-XXXX

 XX-XX-XXXX  XX-XX-XXXX

 Zhejiang Protect Medical Equipment Co., Ltd. (Hefei) Pioneer Medical Equipment Co., Ltd. Science & Technology Zone, Xiaofeng Town 313301, Anji City, Zhejiang China

 MD Europe GmbH Langenhagener Str. 712-90855 Langenhagen Wiener Sander 712-90855 Langenhagen Wiener Sander

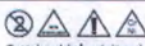 Contains nickel and chromium. Shouldn't use on patients who are known allergic to these elements.

Made in China

Макет маркировки на полный ассортимент регистрируемого медицинского изделия «Лигатура металлическая, варианты исполнения»:



Макет маркировки на полный ассортимент регистрируемого медицинского изделия «Брекет накусочный»:



Макет маркировки на полный ассортимент регистрируемого медицинского изделия «Крючок для установки в самолигирующий металлический брекет РТ-5»:

The label features a green header with the 'PD PROTECT' logo. Below it, the title 'Наименование медицинского изделия:' is followed by a blank space for the product name. A 'PY №' field with a box for input is present. Identification fields include 'REF XX-XX-XXXX' and 'LOT XX-XX-XXXX'. To the right, there are three icons: a waveform, a box, and a clock, each followed by 'XX-XX-XXXX'. The manufacturer information is split into two columns: 'Zhejiang Protect Medical Equipment Co., Ltd. (China)' and 'MD Europa GmbH Langenhagen'. Below this, there are four warning symbols (allergy, biohazard, etc.) and a note about nickel and chromium. Regulatory marks for CE 0197, FDA, ISO13485, and MD are shown. The label ends with a green footer stating 'Made in China'.

Макет маркировки на полный ассортимент регистрируемого медицинского изделия «Ретейнер, варианты исполнения»:

This label template is identical to the one above, featuring the 'PD PROTECT' logo, product name field, 'PY №' field, 'REF' and 'LOT' fields, three icons with 'XX-XX-XXXX' values, manufacturer details for Zhejiang Protect Medical Equipment Co., Ltd. and MD Europa GmbH, warning symbols, regulatory marks (CE 0197, FDA, ISO13485, MD), and a 'Made in China' footer.

Макет маркировки на полный ассортимент регистрируемого медицинского изделия «Маска лицевая»:



Медицинское изделие может быть упаковано в зиплок, в пластиковую прозрачную коробку, в бумажную упаковку, либо в пластиковую трубу.

Брекеты в наборах упаковываются в пластиковую коробку с ячейками под каждую единицу.

При транспортировке медицинское изделие помещают в воздушно-пузырьковую пленку, которое помещают в упаковку из картона. Коробка оклеивается полиэтиленовой лентой с липким слоем.

Символы на упаковке:

Символ	Описание
	Общий предупреждающий знак.
	Указывает, что содержимое транспортной упаковки является хрупким и требует осторожного обращения.
	Указывает, что транспортная упаковка должна быть сухой.
	Указывает, что правильное положение транспортной упаковки - вертикальное.

Технические характеристики упаковки

1. Упаковка устойчива к давлению 20 кг.
2. Упаковка устойчива к ударной нагрузке: свободное падение с высоты не менее 2,5 м не менее 5 раз.

7. Транспортирование, хранение и эксплуатация изделия

8. Условия хранения: изделие следует хранить при температуре от минус 50 С° до плюс 50 С° при относительной влажности до 98% и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа. Хранить в упаковке.
9. Условия транспортирования: изделие следует транспортировать при температуре от минус 10 С° до плюс 50 С° при относительной влажности до 100% и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа.
10. Условия эксплуатации: изделие следует использовать при температуре от 32 С° до 42 и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа.

11. Сведения о стерильности изделия

Изделие поставляется не стерильным. Предназначено для стерилизации пользователем (медицинским персоналом непосредственно перед установкой брекетов).

Производитель рекомендует паровую стерилизацию изделий перед применением (режимы стерилизации: 121°, 20 мин; 134°, 4 мин; 134°, 5 мин; 134°, 7 мин в стерилизаторах, которые соответствуют ГОСТ Р 51935-2002 (EN 285) и малых паровых стерилизаторов, соответствующих EN 13060-2011).

12. Сведения об утилизации

Утилизацию изделия проводить в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы). После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО). Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

13. Соответствие стандартам и методы контроля Российской Федерации

ГОСТ Р 52770-2016. «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

ГОСТ ISO 10993-1-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования».

ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными».

ГОСТ ISO 10993-5-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы invitro».

ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

ГОСТ ISO 10993-11-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследование общетоксического действия».

ГОСТ ISO 10993-12-2015. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы».

ГОСТ 31209-2003 «Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний».

ГОСТ 4011-72. Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа (с Изменениями N 1, 2)

ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии».

ГОСТ Р 55227-2012 «Вода. Методы определения содержания формальдегида», п.6

МУК 4.1.3166-14 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, α -метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава».

И-880-71 «Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами».

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений.

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования».

14. Гарантия

Срок годности металлического медицинского изделия - 5 лет.

Срок годности эластичного медицинского изделия – 2 года.

Адрес для приема рекламаций:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Протект Рус" (ООО "Протект Рус")

Адрес: 115191 Москва, переулок Духовской, дом 17, этаж 2, пом. 1, ком. 2, оф. 53г

ИНН 7726392985, КПП 772601001, ОКПО 05965297.

Производитель:

ZheJiang Protect Medical Equipment Co., Ltd, («Чжецзян Протект Медикал Экуипмент Ко. Лтд»), Китай.

Science & Technology Zone, Xiaofeng Town 313301, Anji City, Zhejiang, China Телефон: 0086-571-87352847

[Перевод с английского и китайского языков на русский язык]

СЕРТИФИКАТ

ССРП

(Китайский комитет содействия развитию международной торговли)

**Китайский комитет содействия развитию международной торговли
и Палата международной торговли Китая**

[На бланке Китайского комитета содействия развитию международной торговли]

01294376

**Китайский комитет содействия развитию международной торговли
Палата международной торговли Китая**

СЕРТИФИКАТ

**[QR-код]
№ 223305B0/001503**

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО: печать компании «ЧЖЕЦЗЯН ПРОТЕКТ МЕДИКАЛ ЭКУИПМЕНТ КО., ЛТД» (ZHEJIANG PROTECT MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD) на прилагаемом ДОКУМЕНТЕ является подлинной.

Китайский комитет содействия развитию международной торговли

**[Печать:
Китайский комитет содействия развитию международной торговли,
сертификация ССРПТ (51)]**

**Подпись уполномоченного лица: /подпись/
Мэн Минли
Дата: 21 июля 2022 г.**

[Рельефная печать Китайского комитета содействия развитию международной торговли, сертификация ССРПТ (51)]


УТВЕРЖДЕНО
Генеральный менеджер «Чжецзян Протект
Медикал Экуипмент Ко., Лтд»
/подпись/
« » _____ 2022 г.

[Печать компании «Чжецзян Протект Медикал Экуипмент Ко., Лтд»]

2022 г.

[Далее следует текст документа «Инструкция по применению изделия „Система ортодонтическая регулируемая“», представленного на русском языках.]

Текст данного документа перевёл переводчик Рахимкулов Эльдар Серкалиевич. Знание иностранного языка подтверждаю. Выполненный перевод является правильным, точным и полным.

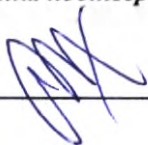

Российская Федерация
Город Москва

Первого декабря две тысячи двадцать второго года

Я, Точкин Дмитрий Валерьевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Рахимкулова Эльдара Серкалиевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 17/2079-н/77-2022-

173062

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб.



Д.В. Точкин

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 155 лист(а)(ов).

Нотариус

