



Фотографические изображения
медицинского изделия

Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

подразделения средств диагностики диабета

ООО «Эбботт Лэбораториз»




Тямаева Л.А.


«17» августа 2023 г.

Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre, в составе: 1. Датчик FreeStyle Libre - 1 шт.




Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre, в составе: 1. Датчик FreeStyle Libre - 1 шт.

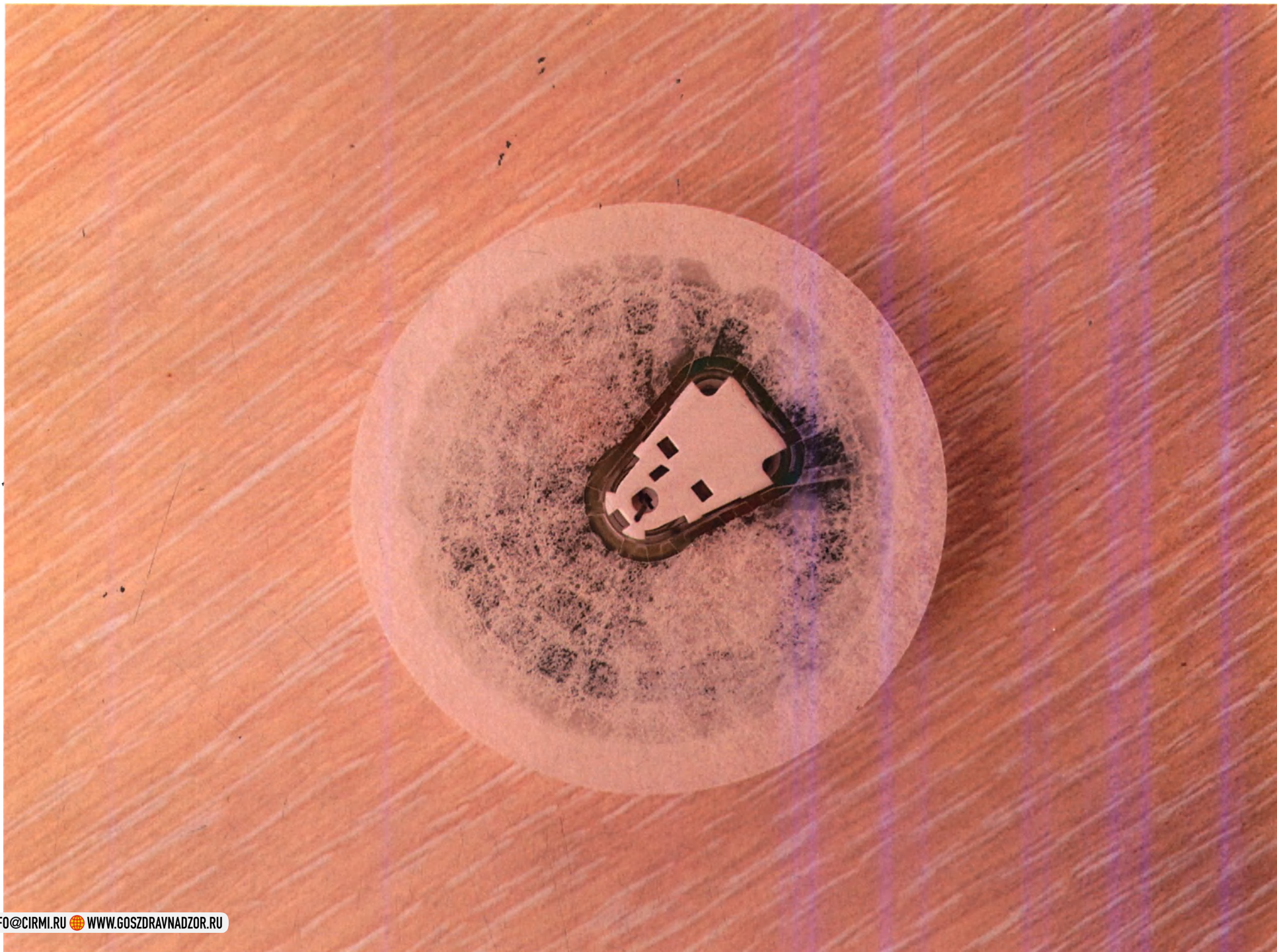

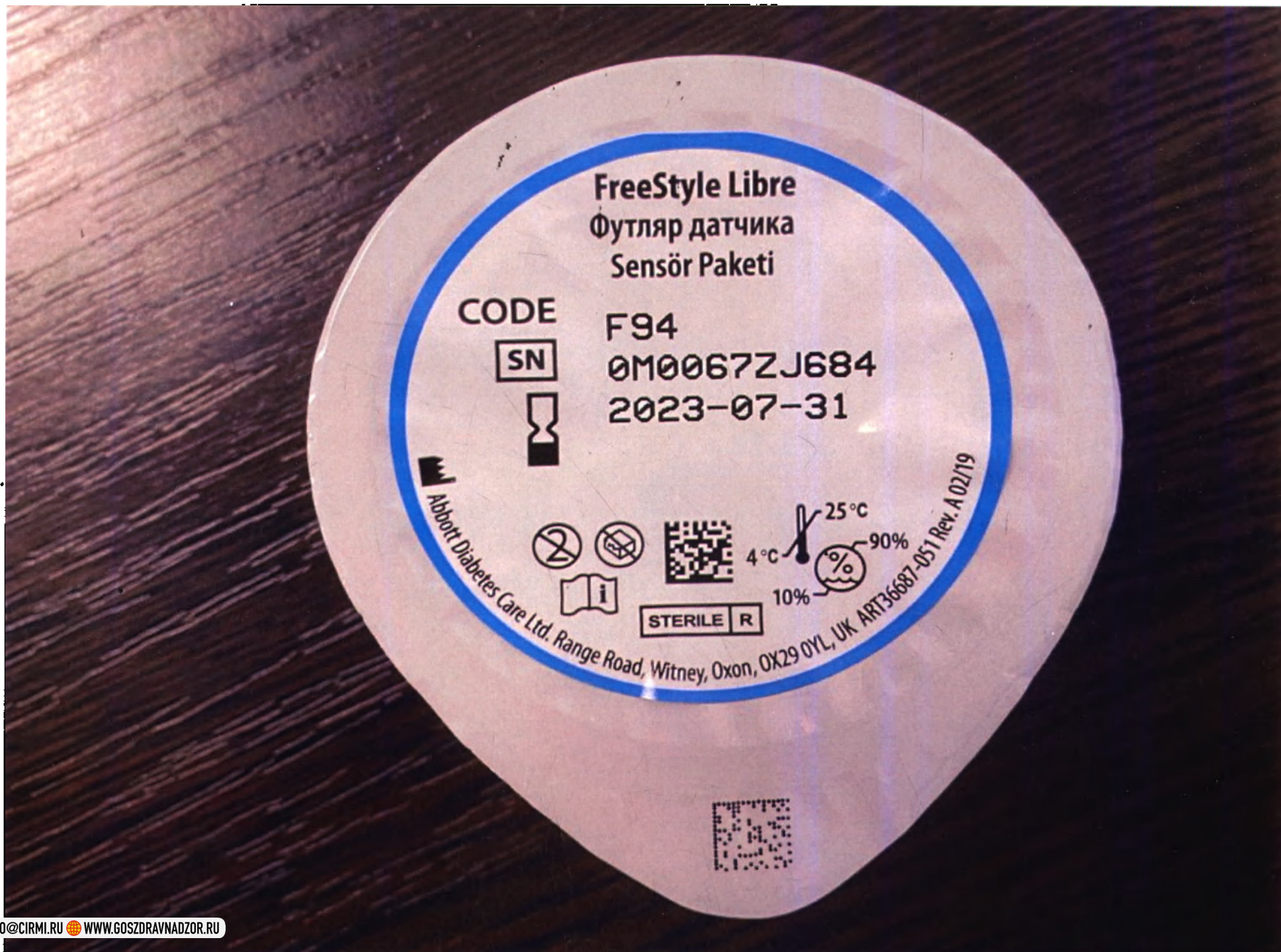

Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre, в составе: 2. Футляр датчика FreeStyle Libre - 1 шт.

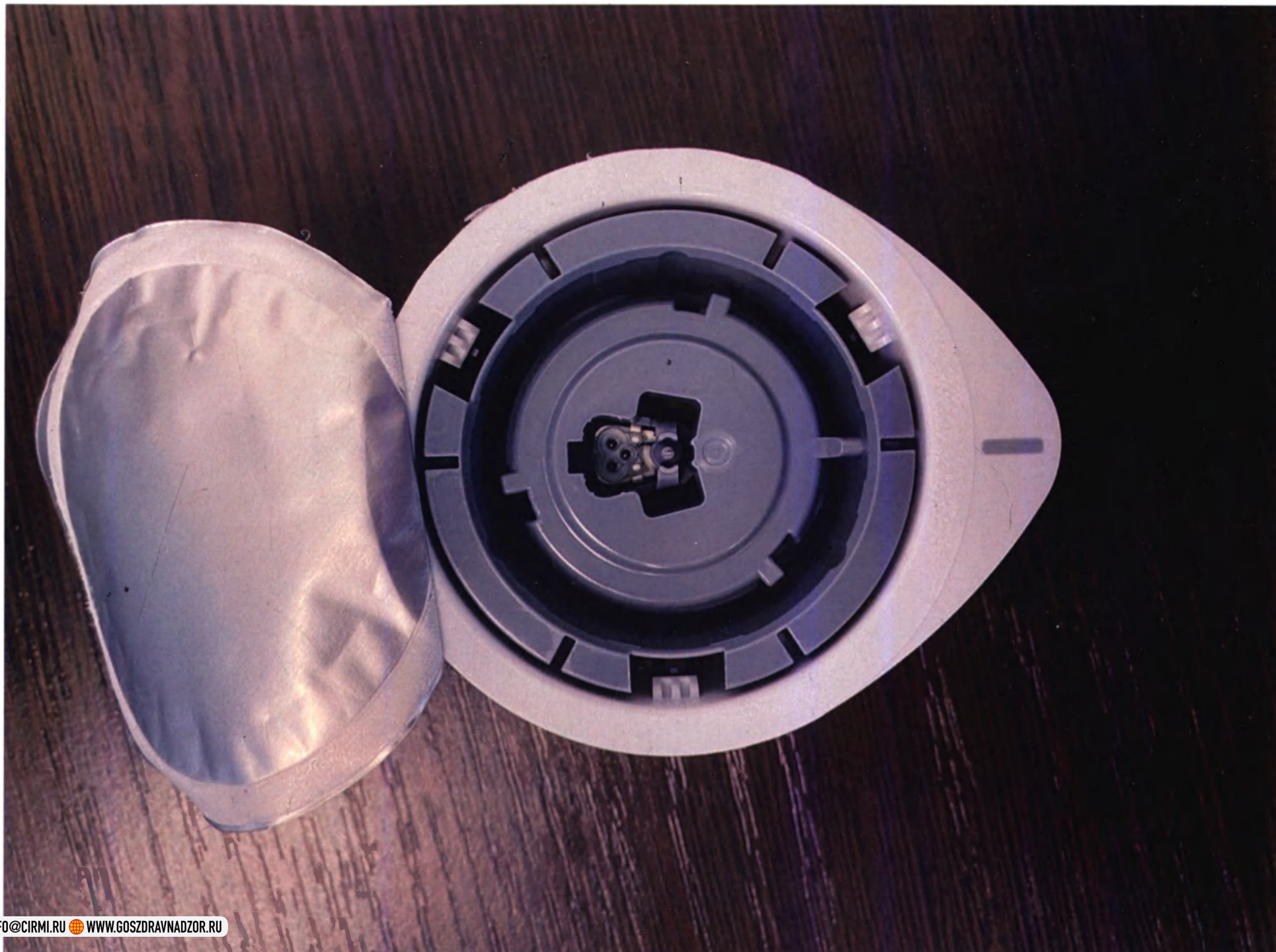

Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre, в составе: 3. Аппликатор датчика FreeStyle Libre - 1 шт.



Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre, в составе: 3. Аппликатор датчика FreeStyle Libre - 1 шт.



Система Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre, в составе: 3. Аппликатор датчика FreeStyle Libre - 1 шт.



ЭТАП 1. Выберите место наложения датчика.

ЭТАП 2. Очистите место наложения датчика спиртовым тампоном и дайте ему высохнуть.

ЭТАП 3. Полностью снимите крышку с футляра датчика. Снимите винтовую крышку с аппликатора датчика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: коды датчика на его футляре и аппликаторе должны совпадать. НЕ используйте устройство, если оно было вскрыто или повреждено.

ЭТАП 4. Совместите темные метки на аппликаторе датчика и футляре датчика. Поместив футляр датчика на твердую поверхность, сильно нажмите на аппликатор датчика, чтобы он дошел до упора.

ЭТАП 5. Движением, направленным вверх, извлеките аппликатор датчика из футляра.

ЭТАП 6. Аппликатор готов к установке датчика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Теперь аппликатор датчика содержит иглу. Не касайтесь внутренних деталей аппликатора датчика и не возвращайте его в футляр.

ЭТАП 7. Расположите аппликатор датчика в месте наложения датчика. Плотное нажмите на него для установки датчика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание случайных результатов или повреждений НЕ нажимайте на аппликатор датчика до его установки на подготовленное место наложения датчика.

ЭТАП 8. Осторожно потяните аппликатор датчика от поверхности кожи.

ЭТАП 9. Убедитесь в надежности крепления датчика. Удалите использованные аппликатор и футляр датчика в отходы согласно местным правилам.

Для использования системы обратитесь к руководству пользователя, прилагаемому к комплекту сканера.

ЭТАП 1. Выберите место.

ЭТАП 2. Вымойте место, на которое будете устанавливать датчик, обычным мылом, дайте коже просохнуть, а затем протрите спиртовым тампоном. Подождите, пока кожа полностью высохнет.

ЭТАП 3. Полностью снимите крышку с футляра датчика. Отвинтите колпачок с аппликатора датчика.

ВНИМАНИЕ: коды датчика на его футляре и аппликаторе должны совпадать. НЕ используйте их, если они имеют признаки повреждения или были ранее вскрыты.

ЭТАП 4. Совместите темные метки на аппликаторе датчика и футляре датчика. Поставьте футляр датчика на твердую поверхность и с усилием, до упора вдавите в него аппликатор датчика.

ЭТАП 5. Извлеките аппликатор датчика из футляра датчика.

ЭТАП 6. Аппликатор готов к установке датчика.

ВНИМАНИЕ: Аппликатор датчика теперь содержит иглу. НЕ касайтесь внутренних частей аппликатора датчика и не вставляйте его обратно в футляр датчика.

ЭТАП 7. Чтобы установить датчик, приложите аппликатор датчика к подготовленному участку кожи и сильно прижмите его к коже.

ВНИМАНИЕ: Во избежание получения непредусмотренных результатов или травмирования НЕ нажимайте на аппликатор датчика, пока он не будет расположен над подготовленным участком кожи.

ЭТАП 8. Осторожно отведите аппликатор датчика от кожи.

ЭТАП 9. Убедитесь в надежности крепления датчика. Утилизируйте использованный футляр датчика и аппликатор датчика. См. раздел «Утилизация».

Для использования системы обратитесь к инструкции по применению, прилагаемой к комплекту сканера. При использовании приложения FreeStyle LibreLink, обратитесь к руководству по эксплуатации в приложении.





FreeStyle *Libre*



Инструкция по применению
медицинского изделия
Система Flash мониторинга глюкозы
FreeStyle Libre



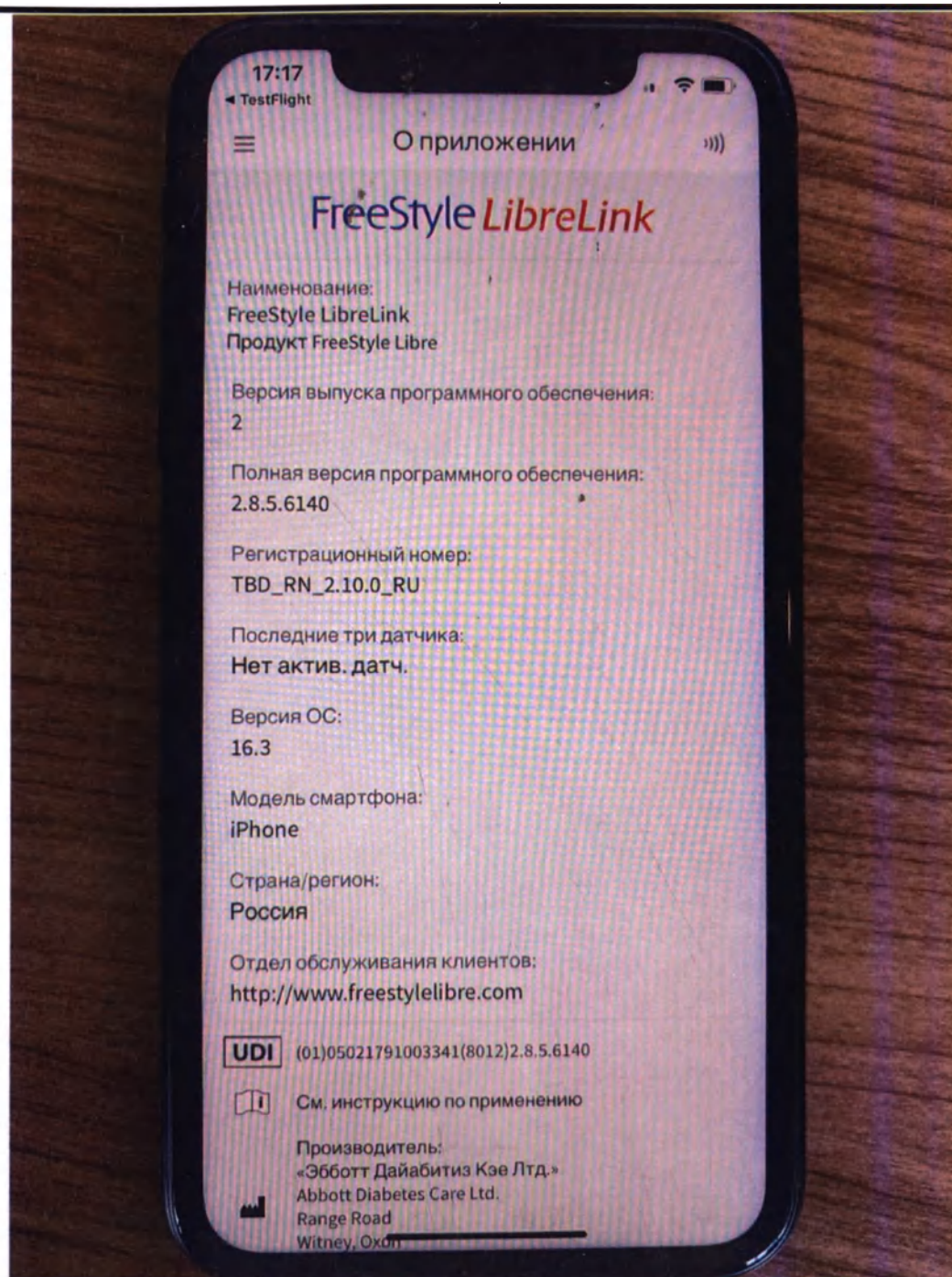

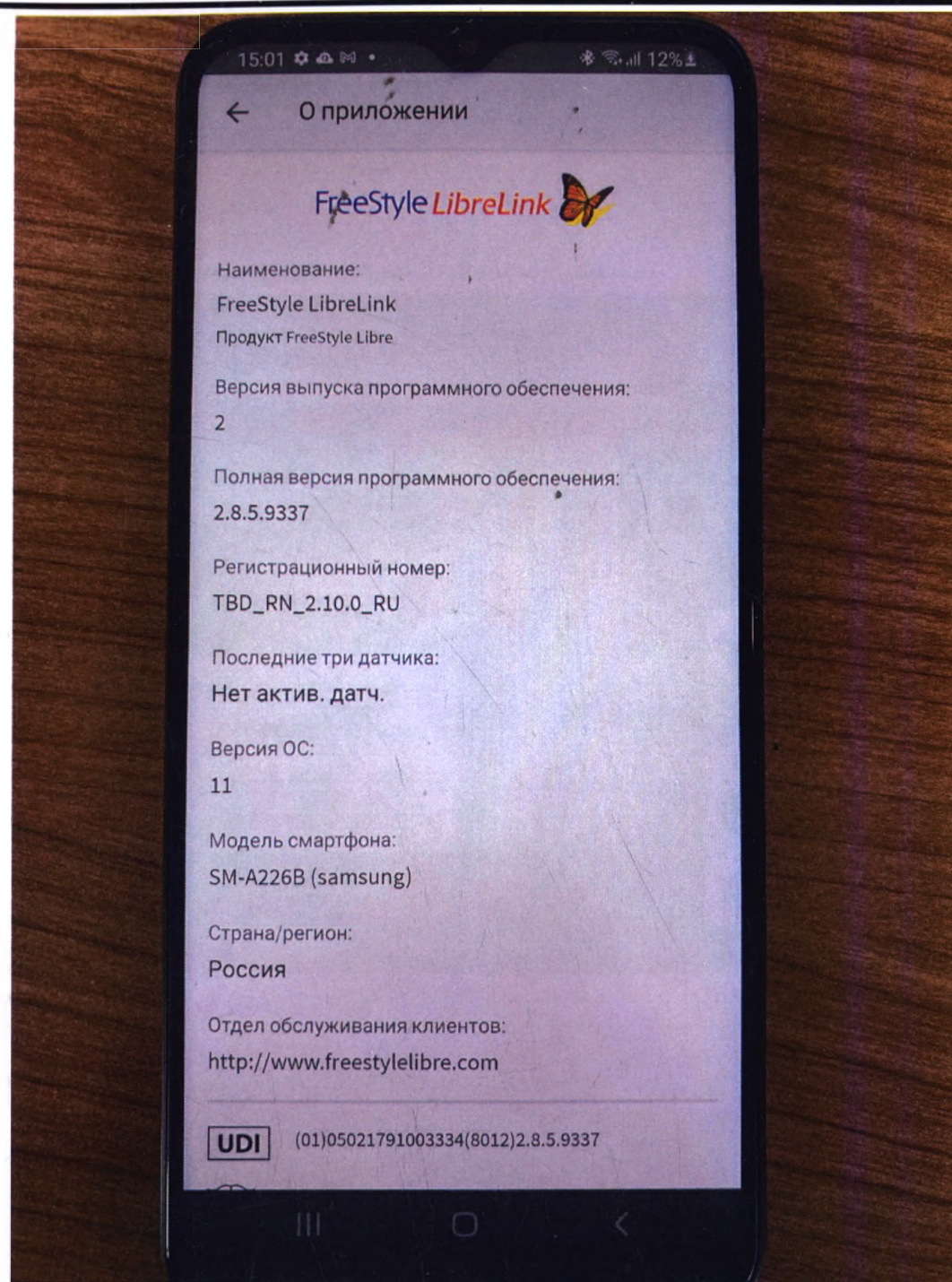

Version (3.13.12)[adc_preprod_ru] LibreView Пациентам Специалистам Зарегистрироваться

Единая система | Достоверные отчеты |
Простой обмен данными

LibreView представляет собой надежную облачную систему наблюдения за больными диабетом, которая предоставляет медицинским работникам и пациентам простые и наглядные отчеты на основе данных с совместимых устройств мониторинга глюкозы FreeStyle.



Вход в качестве члена
медицинского учреждения


Адрес электронной почты


Пароль

Вход в систему


Я забыл(а) пароль



Зарегистрироваться

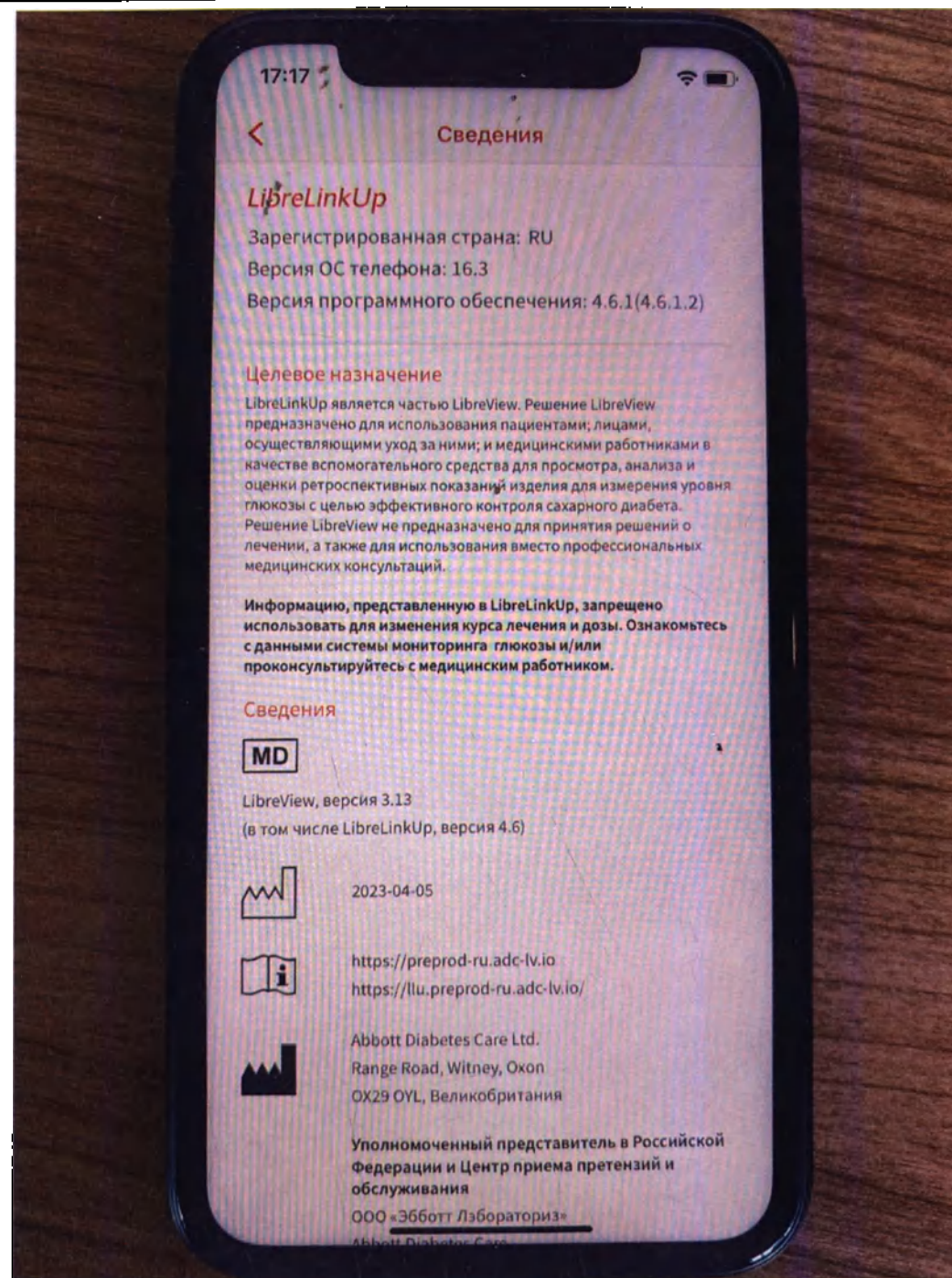

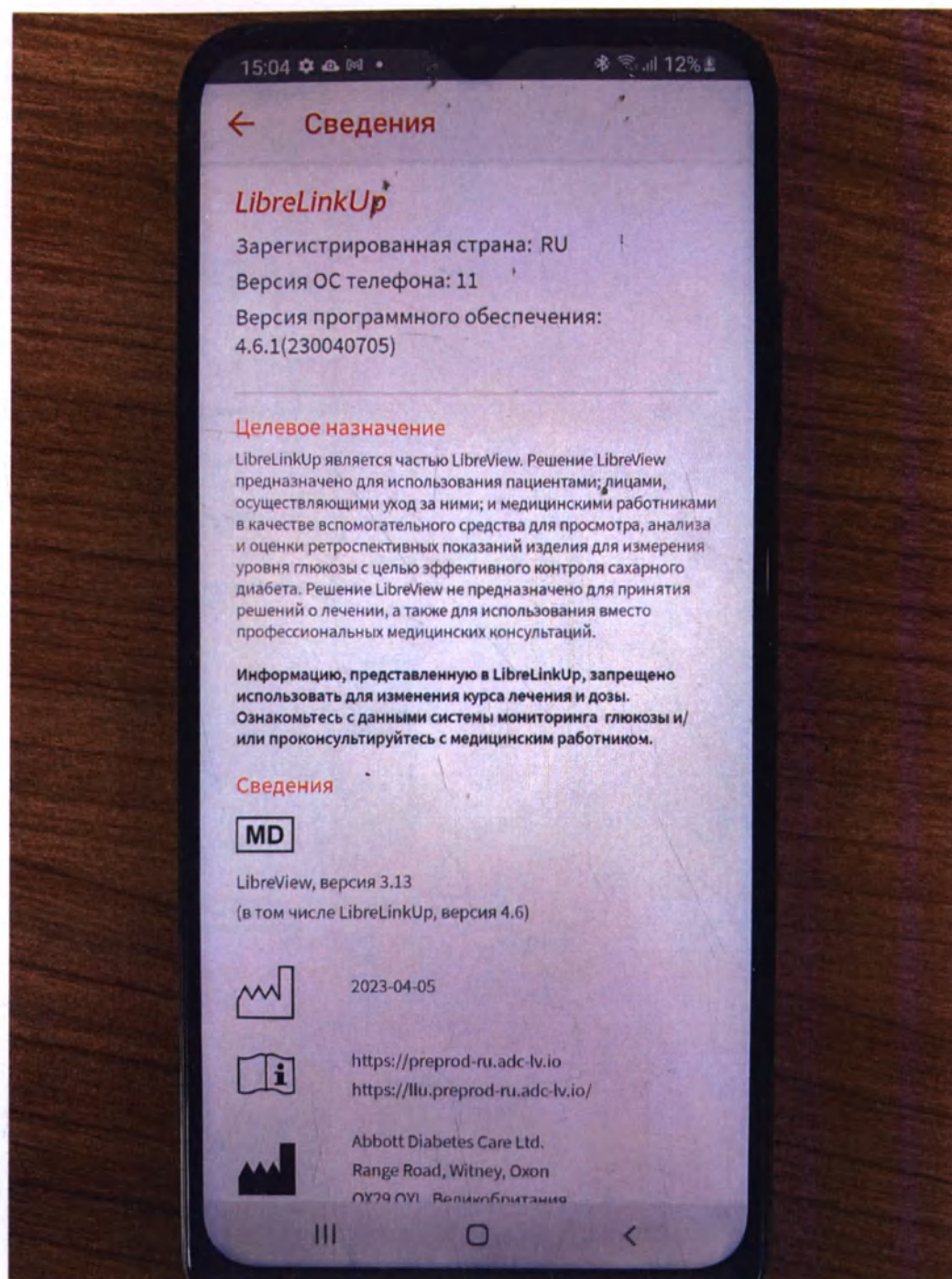

Макет маркировки картонной упаковки комплекта Датчика FreeStyle Libre, предназначенной для российского рынка, в общем виде

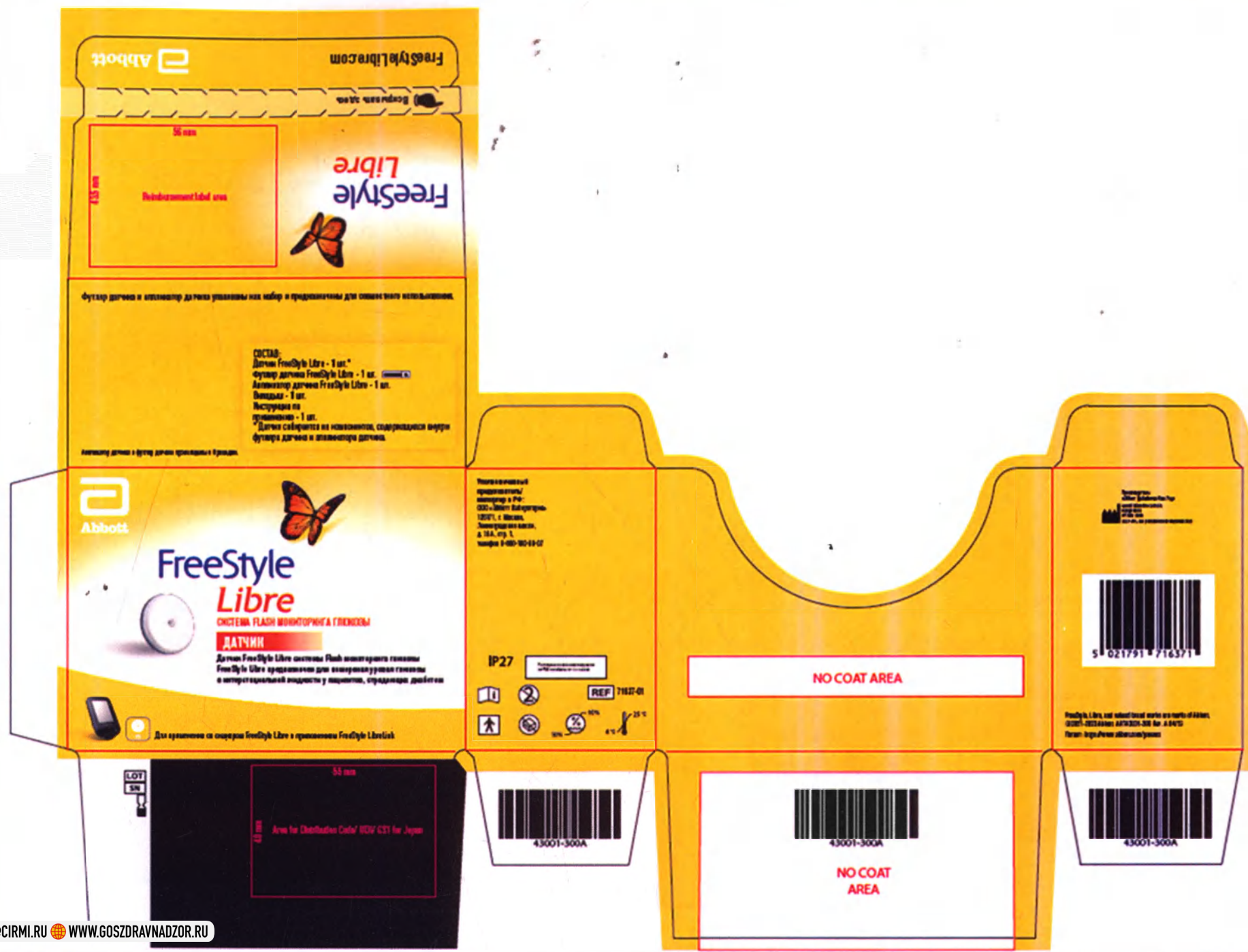

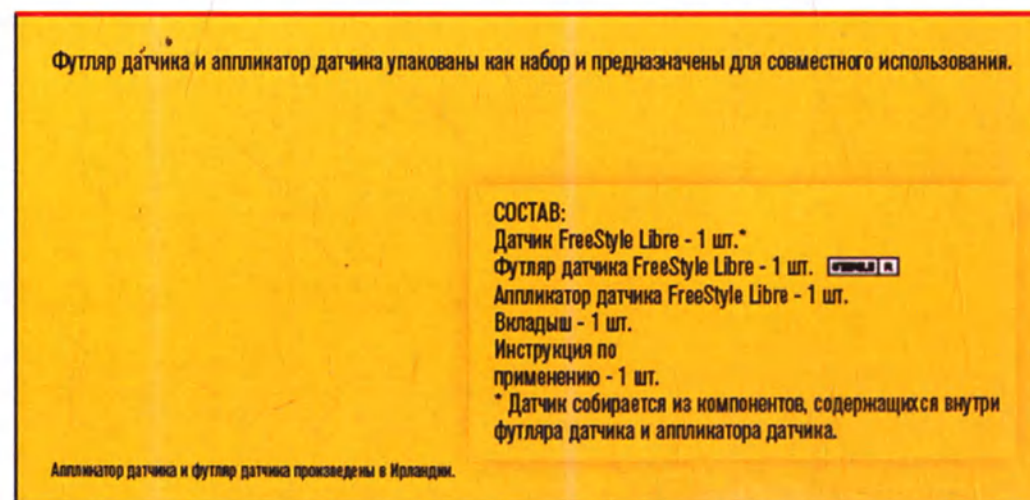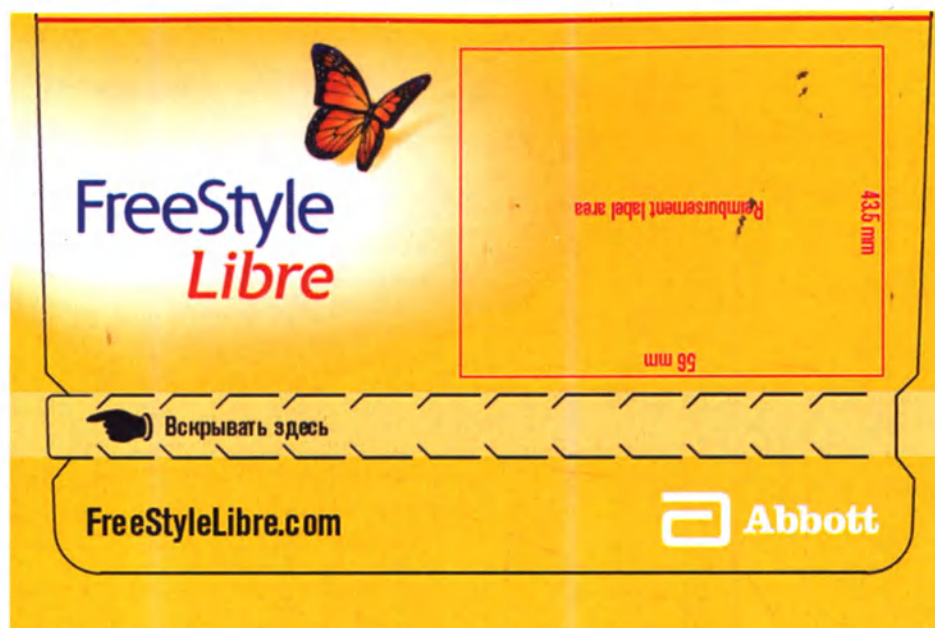

Производитель:
«Эбботт Дайабетис Кэре Лтд»
Abbott Diabetes Care Ltd.
Rangle Road
Wiltley, Ohio
0329 071, UK (Соединенное Королевство)



FreeStyle, Libre, and related brand marks are marks of Abbott.
©2021-2023 Abbott ART43001-300 Rev. A 04/23
Патент: <https://www.abbott.com/patents>



FreeStyle Libre

СИСТЕМА FLASH МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ

ДАТЧИК

Датчик FreeStyle Libre системы Flash мониторинга глюкозы
FreeStyle Libre предназначен для измерения уровня глюкозы
в интерстициальной жидкости у пациентов, страдающих диабетом



Для применения со сканером FreeStyle Libre и приложением FreeStyle LibreLink



Апросто и непосредственно в
(главарь) уезд.
Рядом с нами
есть свои люди, которые
будут с нами.

