

Генеральный директор
ООО «Кардиотехника»



Катковник И.В.

«29» июля 2022 г.

Фотографии (снимки экрана) общего вида медицинского изделия «Программное обеспечение "KTResult Автоматическая обработка данных" ("KTResultAuto") по ТУ 58.29.32.000-011-15192471-2022»

Р360-43# 737*3

X G

➤ **УСТАНОВИТЬ**

 ОБРАБОТАТЬ ОБРАБОТАТЬ ОБРАБОТАТЬ ОБРАБОТАТЬ ОБРАБОТАТЬ ОБРАБОТАТЬ ОБРАБОТАТЬ ОБРАБОТАТЬ ОБРАБОТАТЬ ОБРАБОТАТЬ ОБРАБОТАТЬ

 ООО ЦПМИ **INFO@CIRMI.RU** **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

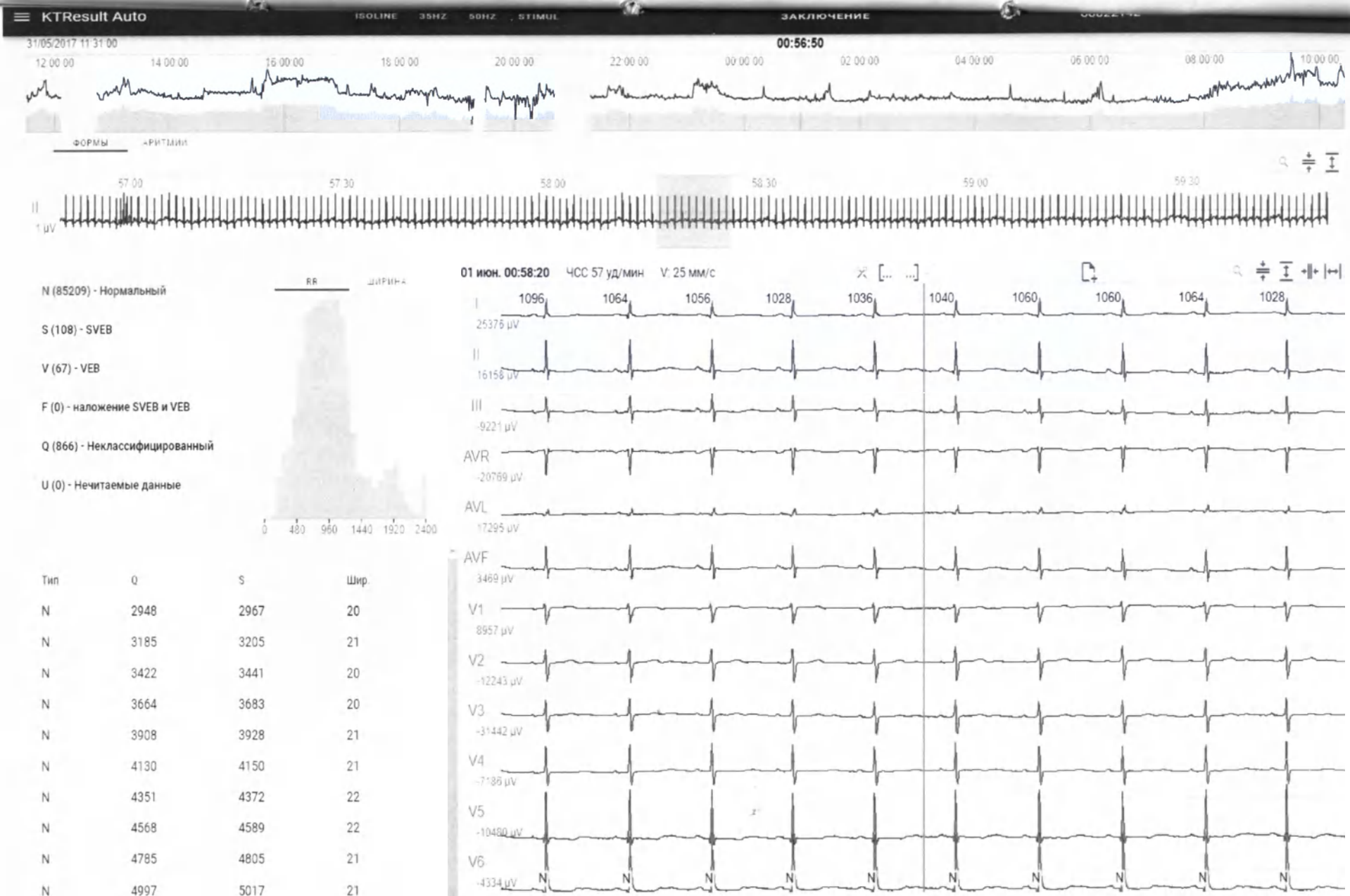


Рисунок 1.2 – Страница «Запись ЭКГ», вкладка «Формы»

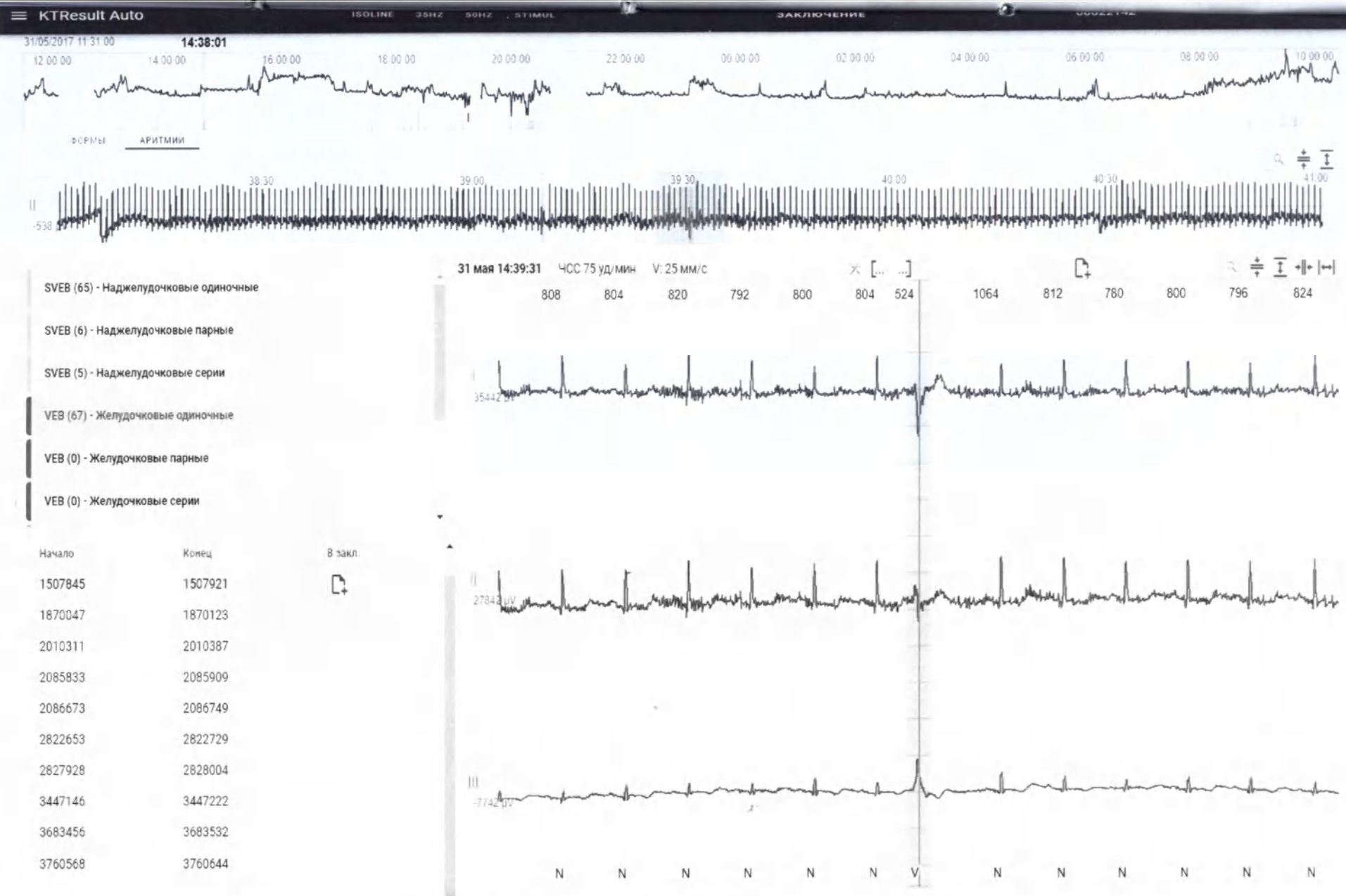


Рисунок 1.3 – Страница «Запись ЭКГ», вкладка «Аритмии»

ФИО врача

Фамилия

Тероева



Имя

Юлия



Отчество

Александровна



Настройки алгоритмов

Брадикардия

Минимальная длительность эпизода, сек

15



Максимальная ЧСС внутри эпизода, уд./мин

50



Тахикардия

Минимальное количество QRS в эпизоде

5



Минимальная ЧСС внутри эпизода, уд./мин

150



Паузы

Минимальная длительность паузы, сек

2



СБРОСИТЬ

ПРИМЕНИТЬ

Рисунок 1.4 – Страница «Настройки»



Запись ЭКГ



Настройки



Статистика



Справка



ПРОГНОЗЫ



БАЗЫ И МЕТОДИКИ



ОТЛИЧИЯ ()

Итоговая таблица

Постатная статистика, требуемая для каждой записи	Общая статистика	Средняя статистика	ahadb	icadb	mitdb	nsfdb	rohdb
Чувствительность QRS, %	99.9	97.38	99.47	99.9	99.13	88.57	99.85
Специфичность QRS, %	99.86	99.56	99.96	100	99.97	97.95	99.94
Чувствительность VEB, %	94.31	92.63	91.8	98	91.15	85.01	97.18
Специфичность VEB, %	93.87	95.22	85.12	99.84	98.14	94.26	98.73
Чувствительность к эпизоду AF, %	77.17	77.17			77.1654		
Специфичность эпизода AF, %	98	98			98		
Чувствительность продолжительности AF, %	56.78	56.78			56.78		
Специфичность продолжительности AF, %	81.37	81.37			81.3687		

Рисунок 1.5 – Страница «Статистика»

Справка

Наименование предприятия-изготовителя

Общество с ограниченной ответственностью «Кардиотехника»
ООО «Кардиотехника»

Наименование медицинского изделия

Программное обеспечение «KTResult Автоматическая обработка данных» (KTResult Auto)
Разработано в соответствии с ТУ 58.29.32.000-011-15192471-2022

Номер и дата регистрационного удостоверения

№ XXXXXXX от XX.XX.20XX

Контактные данные предприятия-изготовителя и службы технической поддержки

Юридический адрес: 191197, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 12, лит. А, пом. часть 1-Н

Тел: (812) 600-43-74; (921) 363-64-71

Электронная почта: ooo@cardiotech.ru

Сайт: <http://www.cardiotech.ru>

Номер версии программного обеспечения

Версия 1.0.10

Руководство пользователя

[Скачать PDF](#)

Рисунок 1.6 – Страница «Справка»

Заключение

ФИО: noSurname noName noPatronymic

Дата рождения: Возраст: 0

Дата обследования: 07.09.2009 Начало: 13:02:00 Номер обследования: 001324

Длительность наблюдения: 21 час. 29 мин. Пригодно для анализа: 21 час. 2 мин.


Анализируемые каналы: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6

ЧСС


ЧСС за время наблюдения: средняя: 54 мин: 30 (16:37:00) макс: 94 (08:00:00)

Общее количество обнаруженных сердечных сокращений: 68372


Тренд ЧСС (10 сек)

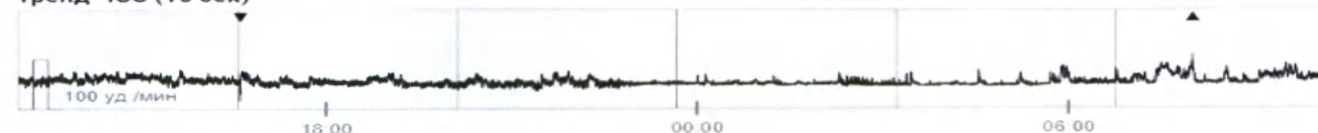

Пример ЭКГ минимальной ЧСС 30 уд./мин (7 сент. 16:37:00)

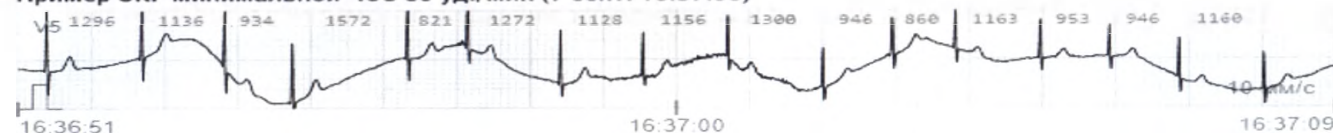

Пример ЭКГ максимальной ЧСС 94 уд./мин (8 сент. 08:00:00)

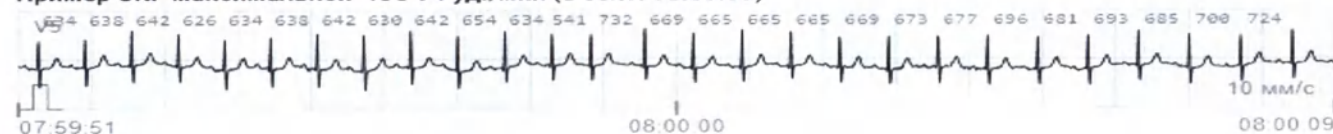

Наджелудочковые эктопические комплексы (SVEB)

За время наблюдения всего было обнаружено 3256 эпизодов нарушения, в частности одиночных 3100, парных 133, серий 23.

Дата	Время	Длит.	Всего	Одиноч.	Парные	Серии	
						Эпизод.	Сокращ.
07 сент.	13:02	0:58	83	79	3	1	3
07 сент.	14:00	1:00	132	121	10	1	3
07 сент.	15:00	1:00	113	107	6	0	0
07 сент.	16:00	1:00	107	99	4	4	13

Рисунок 1.7 – Страница «Заключение»

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью

8 (восемь)
листов



Генеральный
директор
ООО «Кардиотехника»
Камлюков И.В.