

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»



М. Е. Сенина

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК *UREAPLASMA PARVUM*,
UREAPLASMA UREALYTICUM, *MYCOPLASMA HOMINIS*, *GARDNERELLA VAGINALIS*,
CANDIDA ALBICANS МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ
С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ» «АМПЛИПРАЙМ® УРО-5»
ПО ТУ 21.20.23-209-09286667-2023

Транспортная маркировка

Лист утверждения



Маркировка транспортной тары
для набора реагентов для выявления ДНК *Ureaplasma parvum*, *Ureaplasma urealyticum*,
Mycoplasma hominis, *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans* методом полимеразной цепной
реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® УРО-5»
по ТУ 21.20.23-209-09286667-2023

Транспортная этикетка

ООО «НекстБио»

Россия, 111394, город Москва,
улица Полимерная, дом 8, стр. 2

Место № ___ / Количество мест ___

Грузополучатель

Пункт назначения

Условия транспортирования и хранения



Не допускается замораживание реагентов.
Допускается транспортирование при температуре от
8 до 25 °C не более 3 суток.

Масса нетто наборов реагентов ___ кг

Масса брутто ___ кг

Манипуляционные знаки



Верх

Хрупкое. Осторожно



Беречь от влаги

Приложение №2
к договору поставки № ДП-ХХ/ХХ/ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Упаковочный лист

ХХ.ХХ.ХХХХ г.

г. Москва

Договор поставки: № ДП-ХХ/ХХ/ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Покупатель: _____

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "НекстБио"

Товарная накладная №ХХХХХХХХХХ от ХХ месяца ХХХХ г.

№ п/п	Артикул	Наименование товара	Минусовая часть	Кол-во	Серия	Дата выпуска	Срок годности	Ед

СДАЛ:
ОТ ПОСТАВЩИКА
ООО "НекстБио"

ПРИНЯЛ:
ОТ ПОКУПАТЕЛЯ

Должность
ФИО
Подпись
Дата "_____" 20__ г.

Должность
ФИО
Подпись
Дата "_____" 20__ г.

Упаковочный лист

Пронумеровано, скреплено и прошито
3 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»



М.Е. Сенина



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»



М. Е. Сенина

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК *UREAPLASMA PARVUM*,
UREAPLASMA UREALYTICUM, *MYCOPLASMA HOMINIS*, *GARDNERELLA VAGINALIS*,
CANDIDA ALBICANS МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ
С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ» «АМПЛИПРАЙМ® УРО-5»
ПО ТУ 21.20.23-209-09286667-2023

Макеты этикеток

Лист утверждения


Макеты этикеток

для набора реагентов для выявления ДНК *Ureaplasma parvum*, *Ureaplasma urealyticum*, *Mycoplasma hominis*, *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® УРО-5» по ТУ 21.20.23-209-09286667-2023

Наименование
этикетки/реагента

Макет этикетки

Набор (лицевая
сторона)

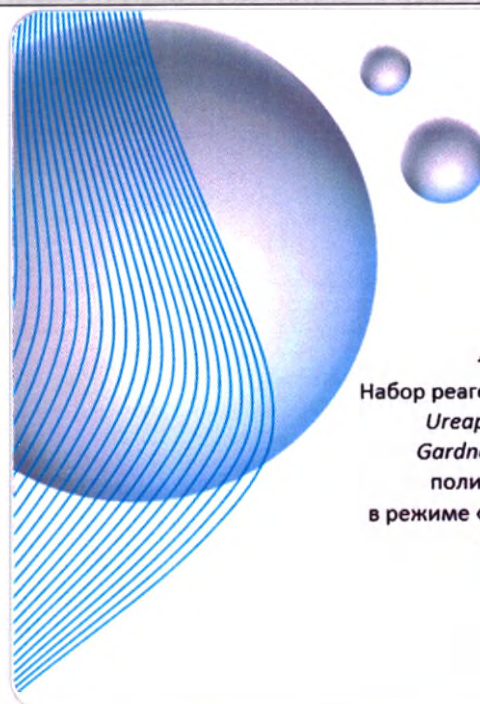

АмплиПрайм® УРО-5

Набор реагентов для выявления ДНК *Ureaplasma parvum*, *Ureaplasma urealyticum*, *Mycoplasma hominis*, *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® УРО-5» по ТУ 21.20.23-209-09286667-2023

Набор, форма 1
(оборотная
сторона)

Набор реагентов для выявления ДНК *Ureaplasma parvum*, *Ureaplasma urealyticum*, *Mycoplasma hominis*, *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® УРО-5» по ТУ 21.20.23-209-09286667-2023

Форма выпуска 1

REF X

Σ 100

2 °C 8 °C



Состав набора:

ПЦР-смесь УРО-5

1,20 мл × 1

LOT ХДДММГГYY

ПЦР-буфер-Н

0,65 мл × 1

ГГГГ-ММ-ДД

ПКО УРО-5

0,26 мл × 1

ГГГГ-ММ-ДД

ОКО

1,10 мл × 1

К-

0,26 мл × 1

Только для диагностики *in vitro*
Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73



ООО «НекстБио»

Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru

РУ № РЗН XXXX/XXXX от дд.мм.гггг



XXXXXXXXXX

Набор реагентов для выявления ДНК *Ureaplasma parvum*, *Ureaplasma urealyticum*, *Mycoplasma hominis*, *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® УРО-5» по ТУ 21.20.23-209-09286667-2023

Форма выпуска 2

REF X

Σ 100

Состав набора:

ПЦР-смесь УРО-5

0,01 мл × 100
(12,5 стрипов по 8 пробирок)

2 °C 8 °C



LOT

ХДДММГГYY

ПЦР-буфер-К

1,20 мл × 1



ГГГГ-ММ-ДД

ПКО УРО-5

0,26 мл × 1



ГГГГ-ММ-ДД

ОКО

1,10 мл × 1

К-

0,26 мл × 1

Только для диагностики *in vitro*
Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится
на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия
доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73



ООО «НекстБио»

Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru

РУ № РЗН XXXX/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ



XXXXXXXXXX

Набор, форма 2
(оборотная
сторона)

ПЦР-смесь
УРО-5, форма 1

АМПЛИПРИМЕ


ПЦР-смесь УРО-5

1,20 мл

REF XXXX LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C

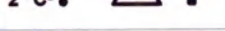

ПЦР-смесь
УРО-5, форма 2

АМПЛИПРИМЕ


ПЦР-смесь УРО-5

0,01 мл × 100
(12,5 стрипов по 8 пробирок)

REF XXXX LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C

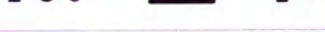

ПЦР-буфер-Н,
форма 1

АМПЛИПРИМЕ

ПЦР-буфер-Н

0,65 мл

REF XXXX

LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C



ПЦР-буфер-К,
форма 2

АМПЛИПРИМЕ

ПЦР-буфер-К

1,20 мл

REF XXXX

LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C



ПКО УРО-5

АМРІРІМЕ

ПКО УРО-5

0,26 мл

REF XXXX

LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C



ОКО

АМРІРІМЕ

ОКО

1,10 мл

REF XXXX

LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 8 °C



К-

АМРІРІМЕ

К-

0,26 мл

REF XXXX

LOT XXXX

ГГГГ-ММ-ДД

2 °C 25 °C



Пронумеровано, скреплено и прошито
4 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБю»

М.Е. Сенина



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»

М. Е. Сенина

«21» июля 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для выявления ДНК *Ureaplasma parvum*, *Ureaplasma urealyticum*,
Mycoplasma hominis, *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans* методом полимеразной цепной
реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® УРО-5»
по ТУ 21.20.23-209-09286667-2023

Набор реагентов для выявления ДНК *Ureaplasma parvum*, *Ureaplasma urealyticum*, *Mycoplasma hominis*, *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® УРО-5» по ТУ 21.20.23-209-09286667-2023

Набор реагентов выпускается в 2 формах выпуска:

Форма выпуска 1 в составе:

1. ПЦР-смесь УРО-5 – 1,20 мл х 1 пробирка
2. ПЦР-буфер-Н – 0,65 мл х 1 пробирка
3. ПКО УРО-5 – 0,26 мл х 1 пробирка
4. ОКО – 1,10 мл х 1 пробирка
5. К- – 0,26 мл х 1 пробирка

Форма выпуска 2 в составе:

1. ПЦР-смесь УРО-5 – 0,01 мл х 100 пробирок (12,5 стрипов по 8 пробирок)¹
2. ПЦР-буфер-К – 1,20 мл х 1 пробирка
3. ПКО УРО-5 – 0,26 мл х 1 пробирка
4. ОКО – 1,10 мл х 1 пробирка
5. К- – 0,26 мл х 1 пробирка

Комплектность набора:

1. Набор реагентов (форма выпуска 1 или 2).
2. Инструкция по применению набора в электронном виде² на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru
3. Краткое руководство по применению набора в бумажном виде.
4. Комплект вкладышей к набору в бумажном виде.
5. Паспорт качества в электронном виде на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru

¹ Пробирки с голубым парафином не используются.

² Печатная версия инструкции доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73.

I. Внешняя (вторичная) упаковка - пакет полиэтиленовый с застёжкой Zip-Lock
«АмплиПрайм® УРО-5», форма выпуска 1
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



**«АмплиПрайм® УРО-5», форма выпуска 1
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ**

Набор реагентов для выявления ДНК *Ureaplasma parvum*, *Ureaplasma urealyticum*, *Mycoplasma hominis*, *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® УРО-5» по ТУ 21.20.23-209-09286667-2023

Форма выпуска 1

REF 2163-11

100

2°C 8°C

Состав набора:

ПЦР-смесь УРО-5

1,20 мл × 1

LOT 328062301

ПЦР-буфер-Н

0,65 мл × 1

2023-06-28

ПКО УРО-5

0,26 мл × 1

2024-06-28

ОКО

1,10 мл × 1

К-

0,26 мл × 1

Только для диагностики *in vitro*
Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится
на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия
доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73





ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru

РУ № РЗН xxxx/xxxx от дд.мм.гггг




328062301

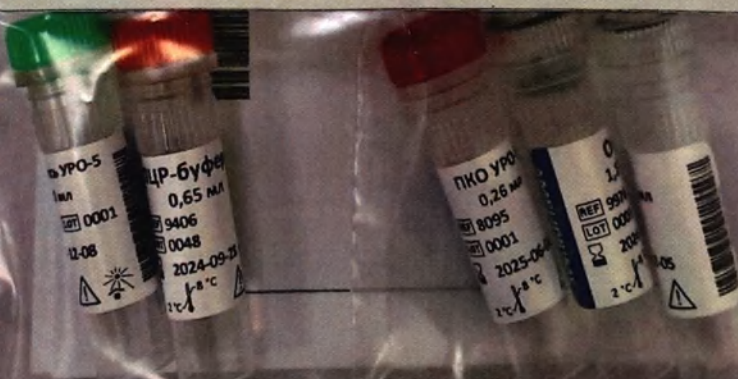


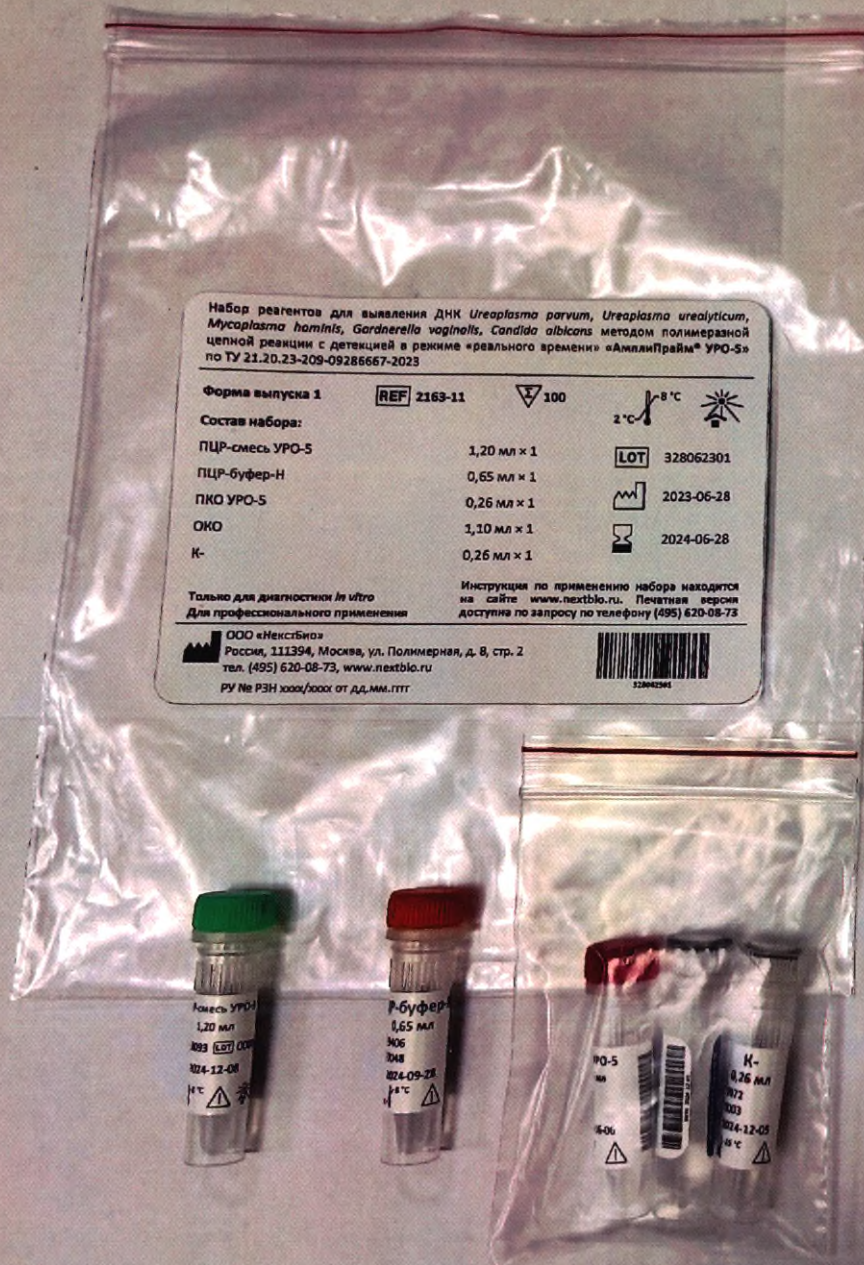

«АмплиПрайм® УРО-5», форма выпуска 1
СОСТАВ

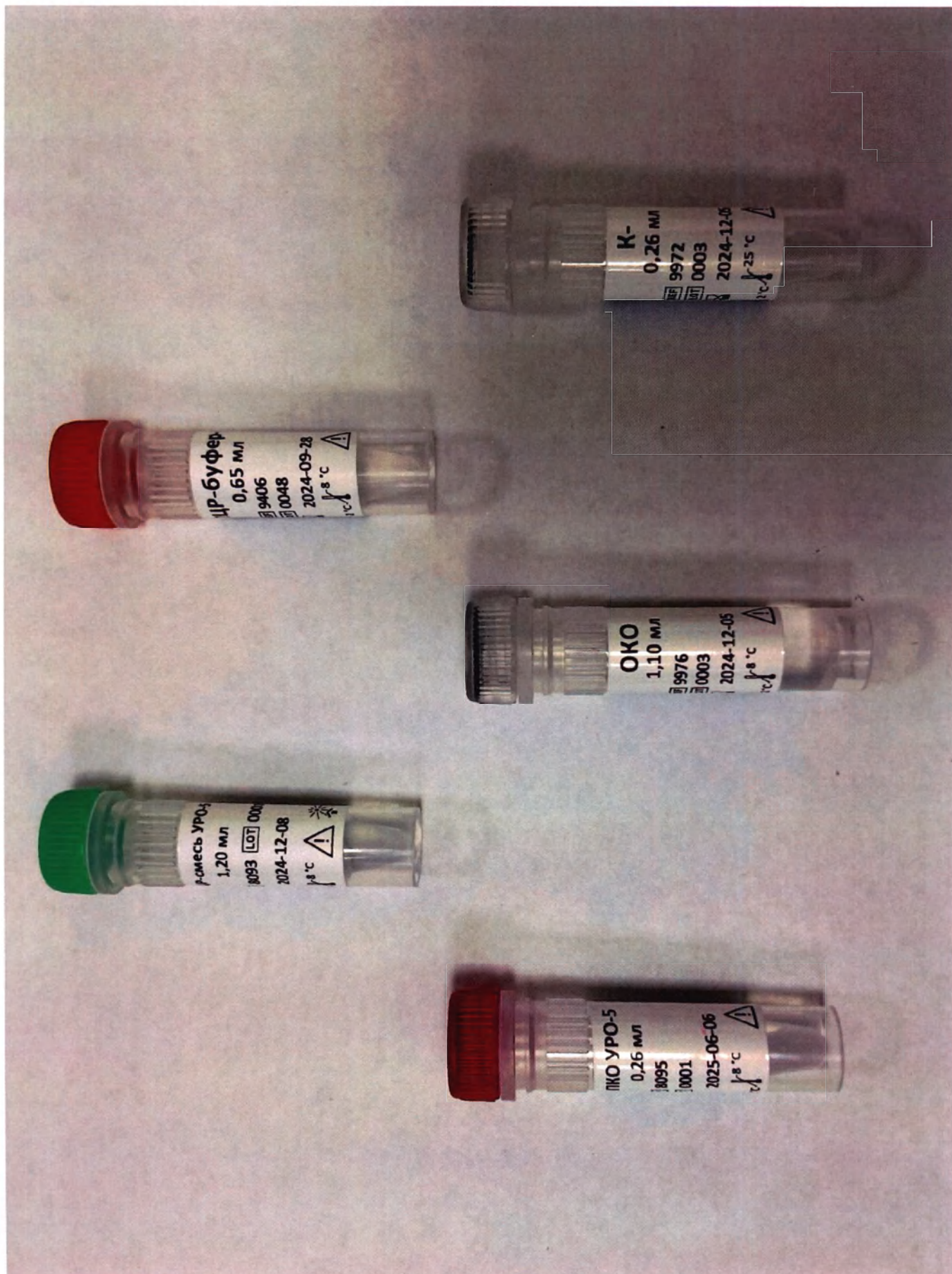

«АмплиПрайм® УРО-5», форма выпуска 2
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ

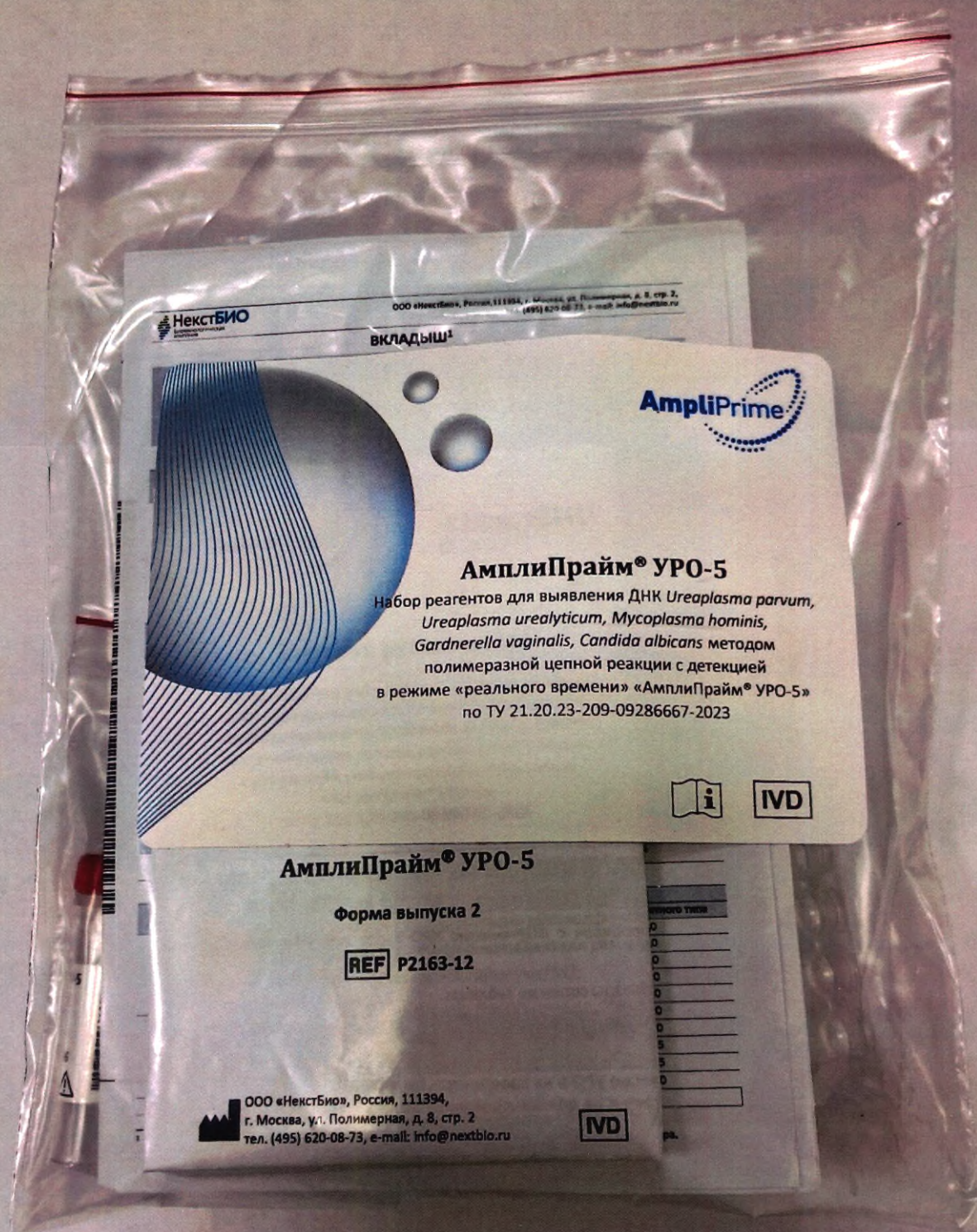

**«АмплиПрайм® УРО-5», форма выпуска 2
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ**



«АмплиПрайм® УРО-5», форма выпуска 2 ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ



«АмплиПрайм® УРО-5», форма выпуска 2
СОСТАВ



II. Внешняя (вторичная) упаковка - пакет металлизированный с застёжкой Zip-Lock
«АмплиПрайм® УРО-5», форма выпуска 1
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



«АмплиПрайм® УРО-5», форма выпуска 1
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ

Набор реагентов для выявления ДНК *Ureaplasma parvum*, *Ureaplasma urealyticum*, *Mycoplasma hominis*, *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® УРО-5» по ТУ 21.20.23-209-09286667-2023

Форма выпуска 1

REF 2163-11

100

2°C 8°C



Состав набора:

ПЦР-смесь УРО-5

1,20 мл x 1

LOT

328062301

ПЦР-буфер-Н

0,65 мл x 1



2023-06-28

ПКО УРО-5

0,26 мл x 1

ОКО

1,10 мл x 1



2024-06-28

К-

0,26 мл x 1

Только для диагностики *in vitro*
Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится
на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия
доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73



ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЗН хххх/хххх от дд.мм.гггг



528062301

«АмплиПрайм® УРО-5», форма выпуска 1 ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

Вкладыш

ООО «НекстБио», Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
Тел. (495) 520-08-73, www.nextbio.ru
RU NE PJH 000/K006 OT AD, mlytt

Набор реагентов для выявления ДНК Уреаплазмы уреалитис, Микоплазмы hominis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени «АмплиПрайм® УРО-5» по ТУ 21.20.23-209-0928667-2023

1. Рекомендуемые условия для хранения реагентов

Наименование	Объем	Условия хранения	Срок годности
Маст-микс УРО-5	1,20 мл x 1	2-8 °C	2023-06-28
ПЦР-буфер-Н	0,65 мл x 1	2-8 °C	2023-06-28
ПКО УРО-5	0,26 мл x 1	2-8 °C	2023-06-28
ОМО	1,10 мл x 1	2-8 °C	2023-06-28
У-	0,26 мл x 1	2-8 °C	2023-06-28

2. Рекомендуемые условия для хранения реагентов

Наименование	Объем	Условия хранения	Срок годности
Маст-микс УРО-5	1,20 мл x 1	2-8 °C	2023-06-28
ПЦР-буфер-Н	0,65 мл x 1	2-8 °C	2023-06-28
ПКО УРО-5	0,26 мл x 1	2-8 °C	2023-06-28
ОМО	1,10 мл x 1	2-8 °C	2023-06-28
У-	0,26 мл x 1	2-8 °C	2023-06-28

3. Рекомендуемые условия для хранения реагентов

Наименование	Объем	Условия хранения	Срок годности
Маст-микс УРО-5	1,20 мл x 1	2-8 °C	2023-06-28
ПЦР-буфер-Н	0,65 мл x 1	2-8 °C	2023-06-28
ПКО УРО-5	0,26 мл x 1	2-8 °C	2023-06-28
ОМО	1,10 мл x 1	2-8 °C	2023-06-28
У-	0,26 мл x 1	2-8 °C	2023-06-28

Вкладыш

Для автоматической обработки результатов к набору «АмплиПрайм® УРО-5»

Группа совместимости: АмплиПрайм

Идентификация:
Набор: 2163-11
Срок годности до:
Методика:
Группа совместимости:
Прибор: Искон-Gen

Штрих-код:

Идентификация:
Набор: 2163-11
Срок годности до:
Методика:
Группа совместимости:
Прибор: Bio-Rad CF

Штрих-код:

Краткое руководство

по применению набора реагентов для выявления ДНК Уреаплазмы уреалитис, Микоплазмы hominis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени «АмплиПрайм® УРО-5» по ТУ 21.20.23-209-0928667-2023

АмплиПрайм® УРО-5

Форма выпуска 1

REF 2163-11

ООО «НекстБио», Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
Тел. (495) 520-08-73, www.nextbio.ru

Набор реагентов для выявления ДНК Уреаплазмы уреалитис, Микоплазмы hominis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени «АмплиПрайм® УРО-5» по ТУ 21.20.23-209-0928667-2023

Форма выпуска 1

REF 2163-11

Состав набора:

Маст-микс УРО-5	1,20 мл x 1
ПЦР-буфер-Н	0,65 мл x 1
ПКО УРО-5	0,26 мл x 1
ОМО	1,10 мл x 1
У-	0,26 мл x 1


Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК Уреаплазмы уреалитис, Микоплазмы hominis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени «АмплиПрайм® УРО-5» по ТУ 21.20.23-209-0928667-2023

Только для диагностики in vitro
Для профессионального применения

ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
Тел. (495) 520-08-73, www.nextbio.ru
RU NE PJH 000/K006 OT AD, mlytt



«АмплиПрайм® УРО-5», форма выпуска 1
СОСТАВ

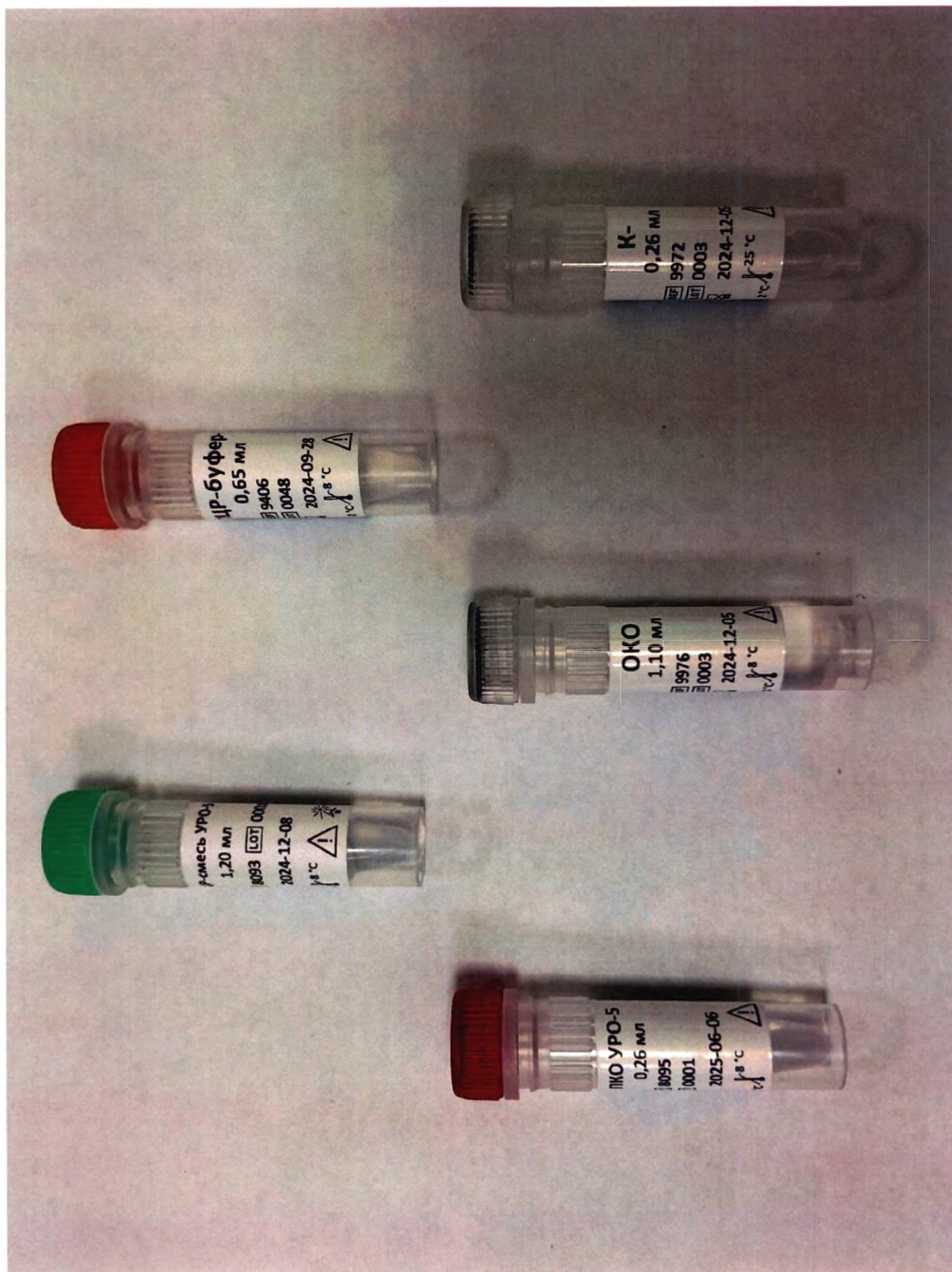

«АмплиПрайм® УРО-5», форма выпуска 2
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



**«АмплиПрайм® УРО-5», форма выпуска 2
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ**

Набор реагентов для выявления ДНК *Ureaplasma parvum*, *Ureaplasma urealyticum*, *Mycoplasma hominis*, *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® УРО-5» по ТУ 21.20.23-209-09286667-2023

Форма выпуска 2

REF P2163-12

Σ 100

2°C 8°C



Состав набора:

ПЦР-смесь УРО-5

0,01 мл × 100
(12,5 стрипов по 8 пробирок)

LOT 328062302

ПЦР-буфер-К

1,20 мл × 1

ПКО УРО-5

0,26 мл × 1

2023-06-28

ОКО

1,10 мл × 1

2024-06-28

К-

0,26 мл × 1

Только для диагностики *in vitro*
Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится
на сайте www.nextbio.ru. Печатная версия
доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73




ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru

РУ № РЗН хххх/хххх от дд.мм.гггг



328062302

«АмплиПрайм® УРО-5», форма выпуска 2
ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

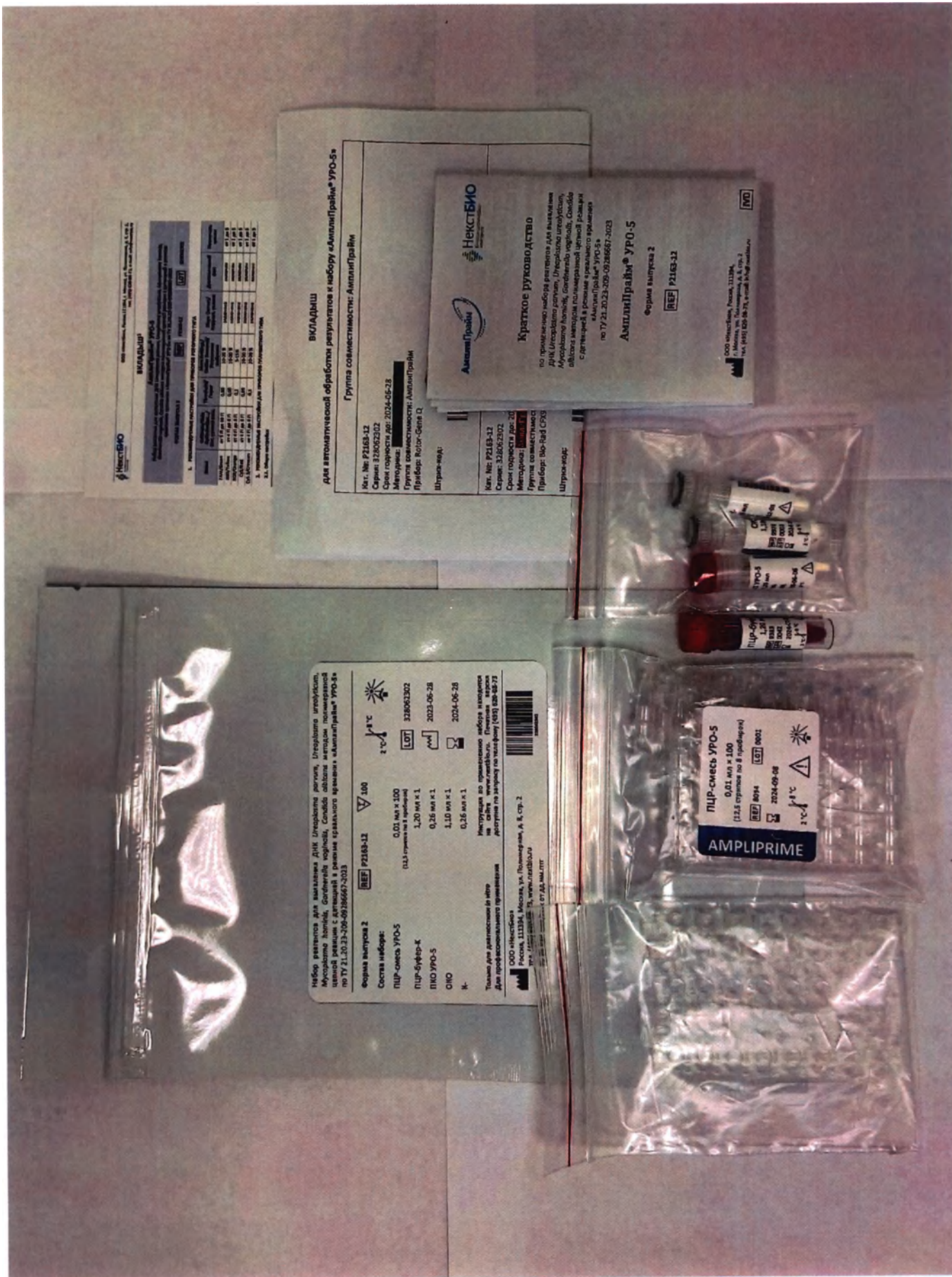

«АмплиПрайм® УРО-5», форма выпуска 2
СОСТАВ



Пронумеровано, скреплено и прошито
18 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»

М.Е. Сенина





УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»



М. Е. Сенина

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК *UREAPLASMA PARVUM*,
UREAPLASMA UREALYTICUM, *MYCOPLASMA HOMINIS*, *GARDNERELLA VAGINALIS*,
CANDIDA ALBICANS МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ
С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ» «АМПЛИПРАЙМ® УРО-5»
ПО ТУ 21.20.23-209-09286667-2023

Комплект вкладышей

Лист утверждения



ВКЛАДЫШ¹

АмплиПрайм® УРО-5

Набор реагентов для выявления ДНК *Ureaplasma parvum*, *Ureaplasma urealyticum*, *Mycoplasma hominis*, *Gardnerella vaginalis*, *Candida albicans* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® УРО-5» по ТУ 21.20.23-209-09286667-2023

ФОРМА ВЫПУСКА X

REF

X

LOT

X

1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ПРИБОРОВ РОТОРНОГО ТИПА

Канал	Calibrate/Gain Optimisation.../Опт. уровня сигн.	Threshold/Порог	More Settings/Outlier Removal/Устранение выбросов	Slope Correct/Коррект. уклона	Динамический фон	Исключить циклы
FAM/Green	от 5 FI до 10 FI	0,03	10-20 %	включена	включен	от 1 до 5
R6G/Yellow	от 4 FI до 8 FI	0,05	10-20 %	включена	включен	от 1 до 5
ROX/Orange	от 4 FI до 8 FI	0,1	5-15%	включена	включен	от 1 до 5
Cy5/Red	от 4 FI до 8 FI	0,05	10-20 %	включена	включен	от 1 до 5
Cy5.5/Crimson	от 4 FI до 8 FI	0,1	10-20 %	включена	включен	от 1 до 5

2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ПРИБОРОВ ПЛАНШЕТНОГО ТИПА

2.1. Общие настройки

Канал	Threshold / Порог	Apply Fluorescence Drift Correction/Применить коррекцию смещения флуоресценции	Исключить циклы
FAM	Пороговая линия для каждого канала устанавливается на уровне, соответствующем 10 - 20 % от максимального уровня флуоресценции, полученного для положительного контрольного образца «ПКО УРО-5» в последнем цикле амплификации.	включена	от 1 до 5
R6G		включена	
ROX		включена	
Cy5		включена	
Cy5.5		включена	

2.2. Настройки для прибора «CFX96»

Параметр	Шаг этапа циклирования	Ramp Rate
Step Options	95 °C	2,5 °C/sec
	60 °C	2,5 °C/sec

2.3. Настройки для приборов «ДТпрайм»

Метод	Тип анализа	Каналы	Критерий положительного результата ПЦР
Пороговый (Ct)	Ct (Cp) для всех каналов	FAM, R6G, ROX, Cy5, Cy5.5	70 %

3. ГРАНИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОРОГОВОГО ЦИКЛА (Ct)

Образец	Канал для флуорофора	Граничное значение Ct	
		Прибор роторного типа	Прибор планшетного типа
Исследуемые образцы	FAM / <i>U. parvum</i>	≤ 40,0	≤ 41,0
	R6G / <i>U. urealyticum</i>	≤ 38,0	≤ 41,0
	ROX / <i>M. hominis</i>	≤ 37,0	≤ 41,0
	Cy5 / <i>G. vaginalis</i>	≤ 37,0	≤ 40,0
	Cy5.5 / <i>C. albicans</i>	≤ 35,0	≤ 37,0
ПКО УРО-5	FAM	≤ 34,0	≤ 36,0
	R6G	≤ 32,5	≤ 36,0
	ROX	≤ 32,0	≤ 35,5
	Cy5	≤ 33,5	≤ 36,5
	Cy5.5	≤ 33,0	≤ 35,0
ОКО	FAM, R6G, ROX, Cy5, Cy5.5	Значение Ct отсутствует	

ВКЛАДЫШ

для автоматической обработки результатов к набору «АмплиПрайм® УРО-5»

Группа совместимости: АмплиПрайм

Кат. №: X
Серия: X
Срок годности до: ГГГГ-ММ-ДД
Методика: АмплиПрайм УРО-5
Группа совместимости: АмплиПрайм
Прибор: Rotor-Gene Q

Штрих-код:

Поле для штрих-кода

Кат. №: X
Серия: X
Срок годности до: ГГГГ-ММ-ДД
Методика: АмплиПрайм УРО-5
Группа совместимости: АмплиПрайм (CFX96)
Прибор: Bio-Rad CFX96

Штрих-код:

Поле для штрих-кода

Кат. №: X
Серия: X
Срок годности до: ГГГГ-ММ-ДД
Методика: АмплиПрайм УРО-5
Группа совместимости: АмплиПрайм (QuantStudio 5)
Прибор: QuantStudio 5

Штрих-код:

Поле для штрих-кода

Кат. №: X
Серия: X
Срок годности до: ГГГГ-ММ-ДД
Методика: АмплиПрайм УРО-5
Группа совместимости: АмплиПрайм (ДТпрайм)
Прибор: ДНК-Технология ДТпрайм

Штрих-код:

Поле для штрих-кода

Пронумеровано, скреплено и прошито
3 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»



М.Е. Сенина