

ЧЕРТЕЖИ

УПАКОВОК и МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ



«Средство местное гемостатическое стерильное для временной
остановки наружных травматических кровотечений по
ТУ 32.50.50-004-67539369-2017»

Рис. 1


Вид сверху
Развернутое состояние

Б

Развернутое состояние Сложенное состояние

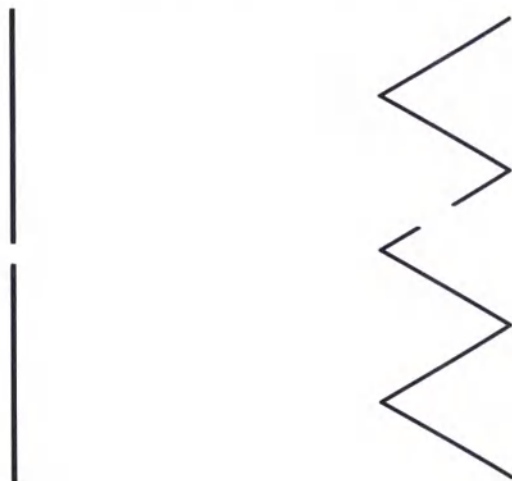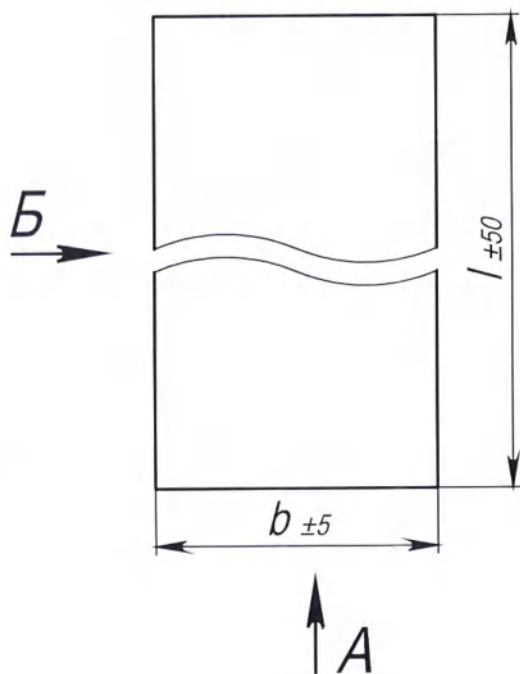

А (50 : 1)

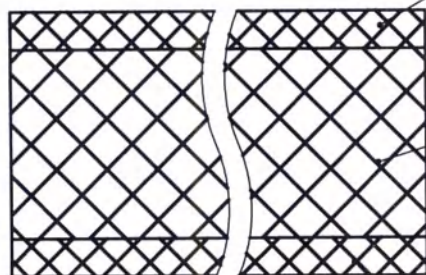

Слой нановолокон хитозана
модифицированный
высокодисперсным серебром

Слой нетканного материала

Слой нановолокон хитозана
модифицированный
высокодисперсным серебром

Рис.2

Остальное см. рис.1

Перфорация п.2

яние


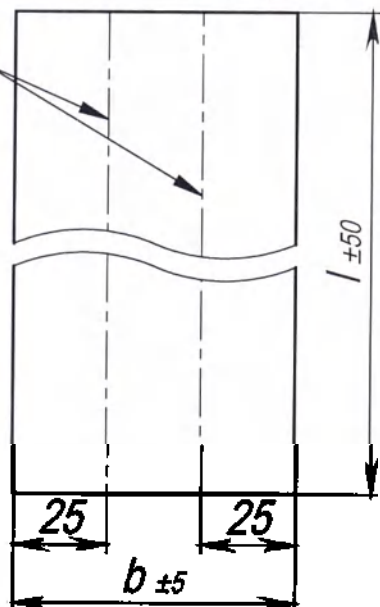


Рис.3

Остальное см. рис.1

Перфорация п.2

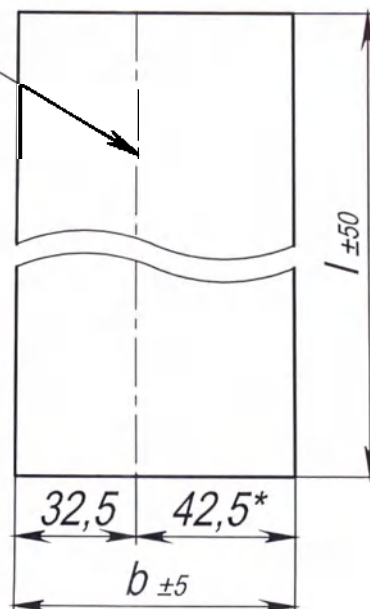


Обозначение	Рис.	Длина изделия l, мм	Ширина изделия b, мм	Примечание
МДЛА.942416.000		1500	100	без перфорации
-01		1600		
-02		1750		
-03		2000		
-04	1	2250		
-05		2500		
-06		2750		
-07		3000		
-08		1500		
-09	2	1600	75	с перфорацией
	3			
-10		1750		без перфорации
-11		2000		
-12		2250		
-13	1	2500		
-14		2750		
-15		3000		
-16		150		

- *Размеры для справок.
- Перфорацию выполнить по технологии.

				МДЛА.942416.000				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных травматических кровотечений	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Забивалова	В.И.	08.23				1:2
Пров.		Шихова	В.И.	01.25				
Т. контр.						Лист	Листов 1	
					ООО "Инмед"			

МДЛА.942416.000УЧ1

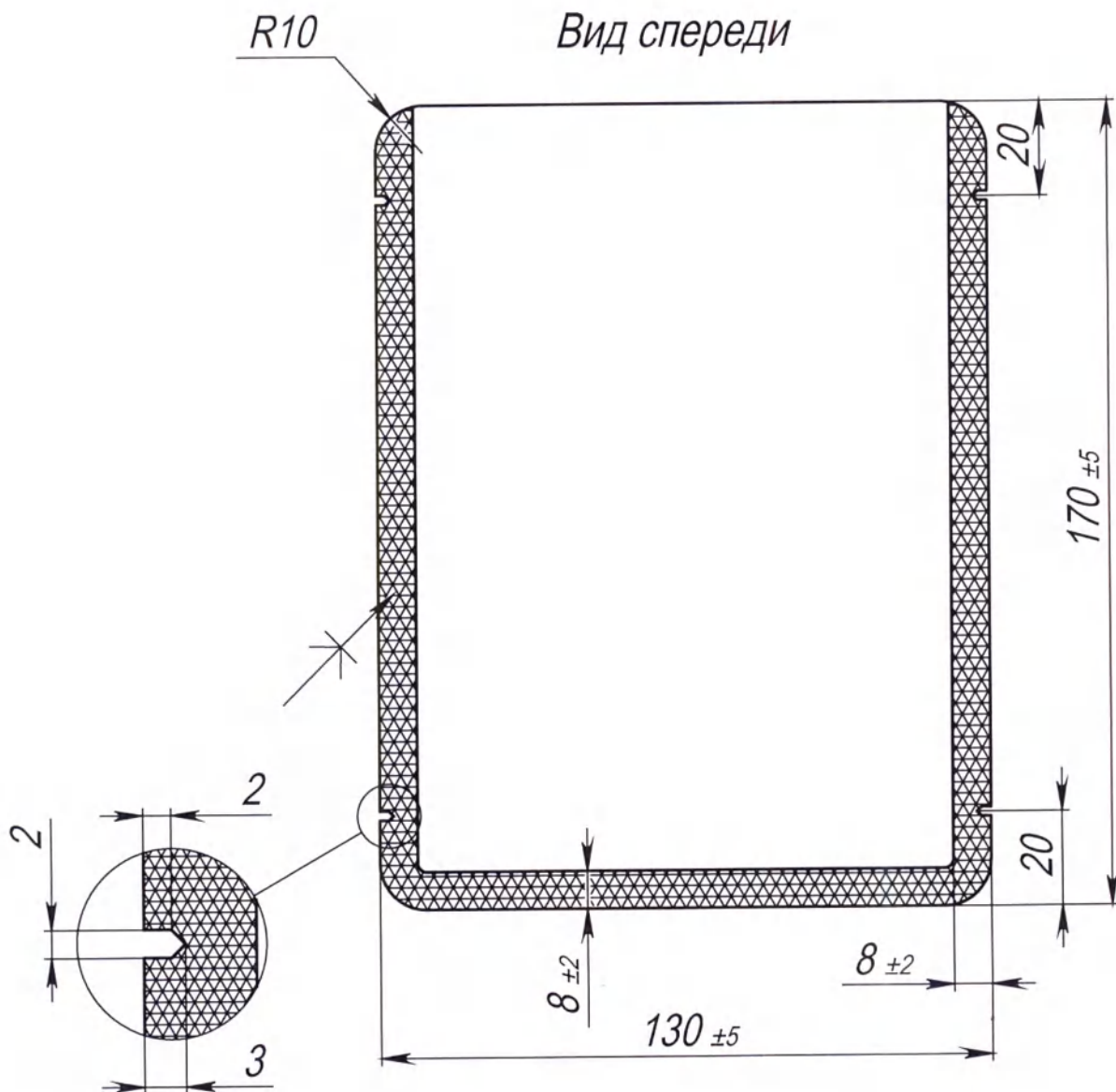

1 H16; h16; $\pm IT/2$.

МДЛА.942416.000УЧ1

Барьерная система
для стерилизации

PET12/AL6.35/PE95

Лит. Масса Масштаб


0,037 1:1.5

Лист Листов 1

ООО "Инмед"

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Забивалова	<i>Забивалова</i>	08.23
Пров.		Шихова	<i>Шихова</i>	08.23
Т. контр.				
Утв.		Савченко	<i>Савченко</i>	08.23

МДЛА.942416.000УЧ2

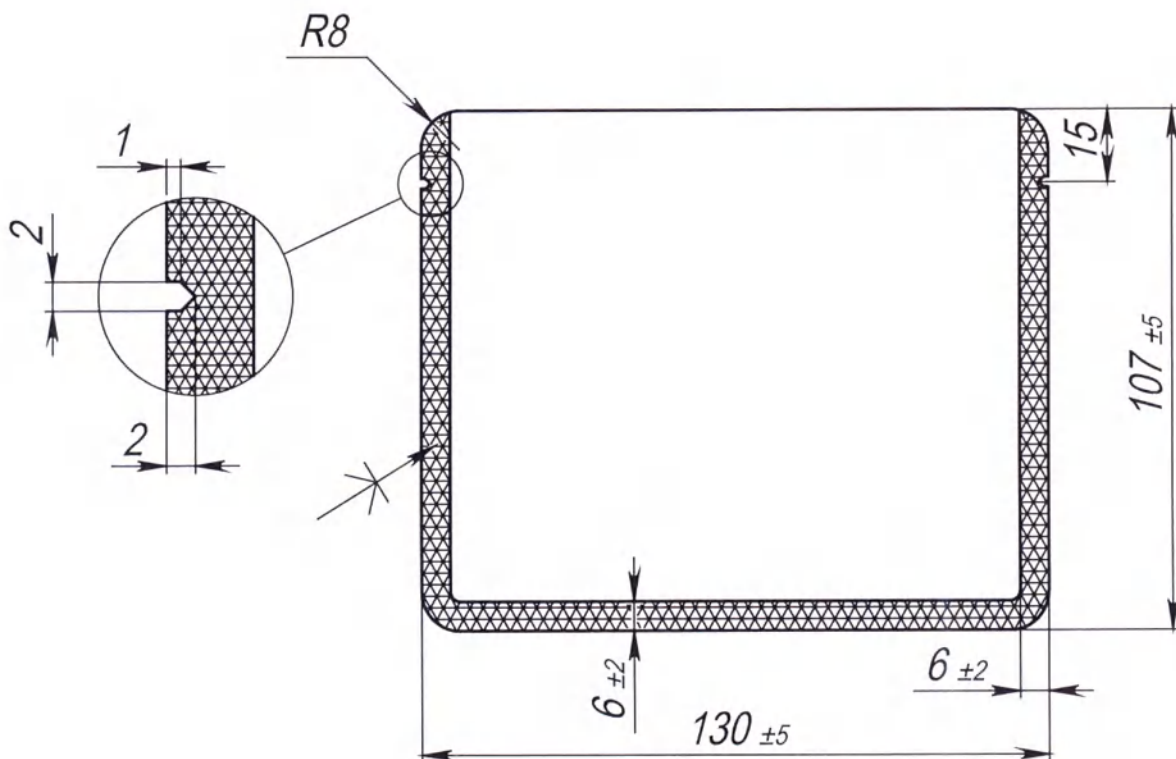

Перв. примен.

Стр. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Забивалова	Лисов	08.23	
Пров.	Шихова	Лисов	08.23	
Т. контр.				
Н. контр.	Пятунина	Лисов	08.23	

МДЛА.942416.000УЧ2

Барьерная система
для стерилизации

PET12/AL6.35/PE95

Лит.	Масса	Масштаб
	0,037	1:1.5
Лист		Листов 1
ООО "Инмед"		

МДЛА.942416.000

Вид спереди



Вид сверху

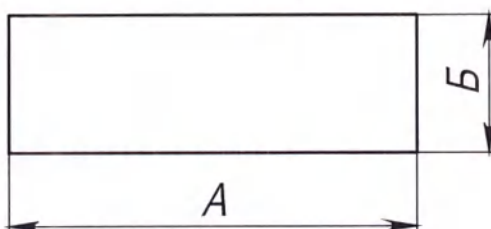


Таблица 1

Вариант исполнения групповой упаковки				
Наименование	А	Б	С	Масса
Упаковка 1	226 $\pm$ 1	48 $\pm$ 1	154 $\pm$ 1	0,03077
Упаковка 2	226 $\pm$ 1	76 $\pm$ 1	154 $\pm$ 1	0,03786

МДЛА.942416.000УЧЗ

Групповая упаковка

Лит. Масса Масштаб

см. табл. 1:4

Лист Листов 1

Картон GC2 295 г/м2


ООО "Инмед"

Копировал


Формат А4

МДЛА.942416.000

Вид спереди

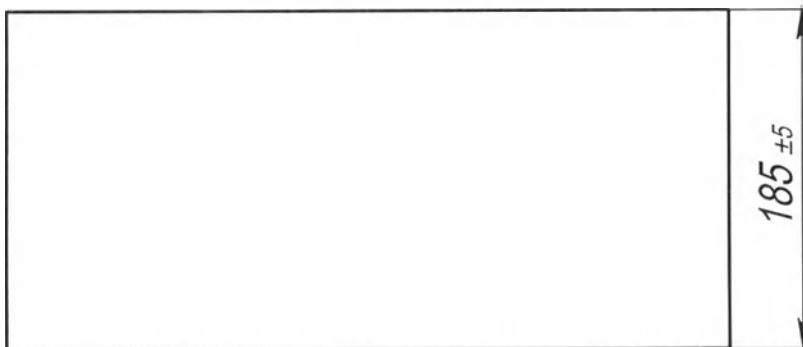

Вид сверху

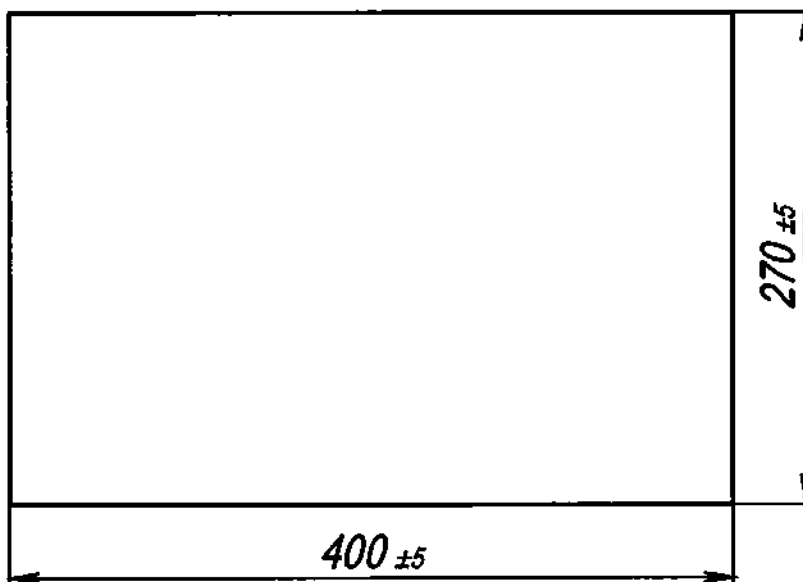

МДЛА.942416.000УЧ4

Транспортная упаковка

Картон Т-23 белый
профиль В

Лит.	Масса	Масштаб
	0,256	1:4
Лист		Листов 1
ООО "Инмед"		

Перв. примен.

Страв. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Забивалова	Г.В.С.	08.23	
Пров.	Шихова	Г.В.С.	08.23	
Т. контр.				
Н. контр.	Пятунина	Г.В.С.	08.23	

МДЛА.942416.000

Вид спереди

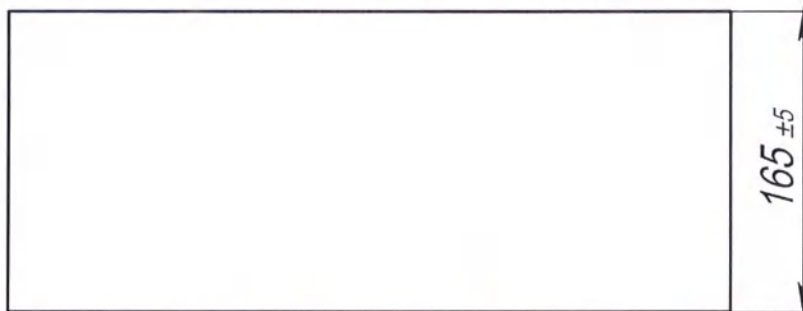

Вид сверху

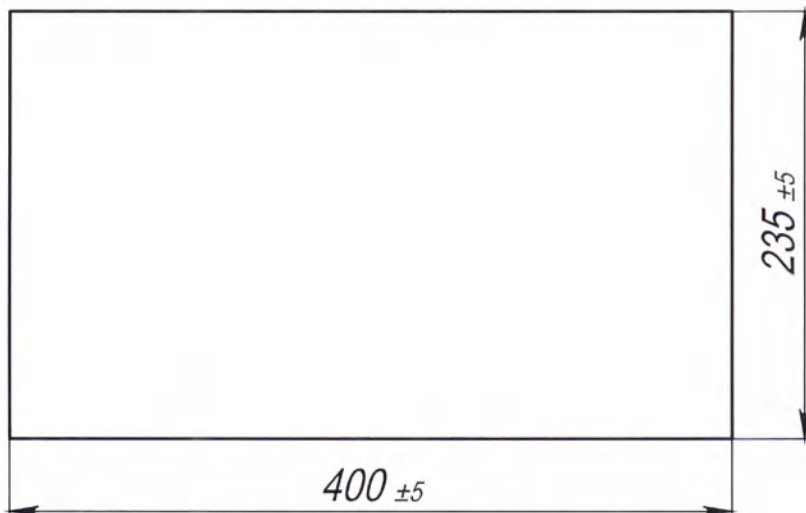

Герб. примен.

Стр. №

Подп. и Дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

МДЛА.942416.000УЧ5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Забивалова	<i>[Signature]</i>	28.23
Пров.		Шихова	<i>[Signature]</i>	28.23
Т. контр.				
Н. контр.		Пятунина	<i>[Signature]</i>	28.23

Транспортная упаковка

Лит.	Масса	Масштаб
	0,25	1:4
Лист		Листов 1

Картон Т-23 белый
профиль В


ООО "Инмед"

МДЛА.942416.000

Вид спереди



Вид сверху

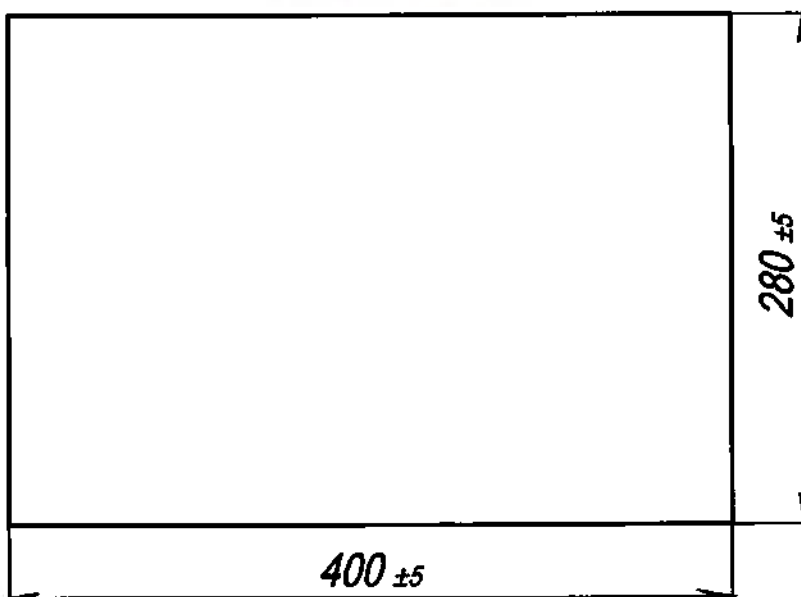

МДЛА.942416.000УЧ6

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Забивалова	А.С.Б.	08.23	
Пров.	Шихова	О.С.Б.	08.23	
Т. контр.				
Н. контр.	Пятунина	А.С.Б.	08.23	

Транспортная упаковка


Лит.	Масса	Масштаб
	0,256	1:4
Лист		Листов 1

Картон П-32 бурый
профиль В

ООО "Инмед"

МДЛА.942416.000УЧ7

Вид спереди

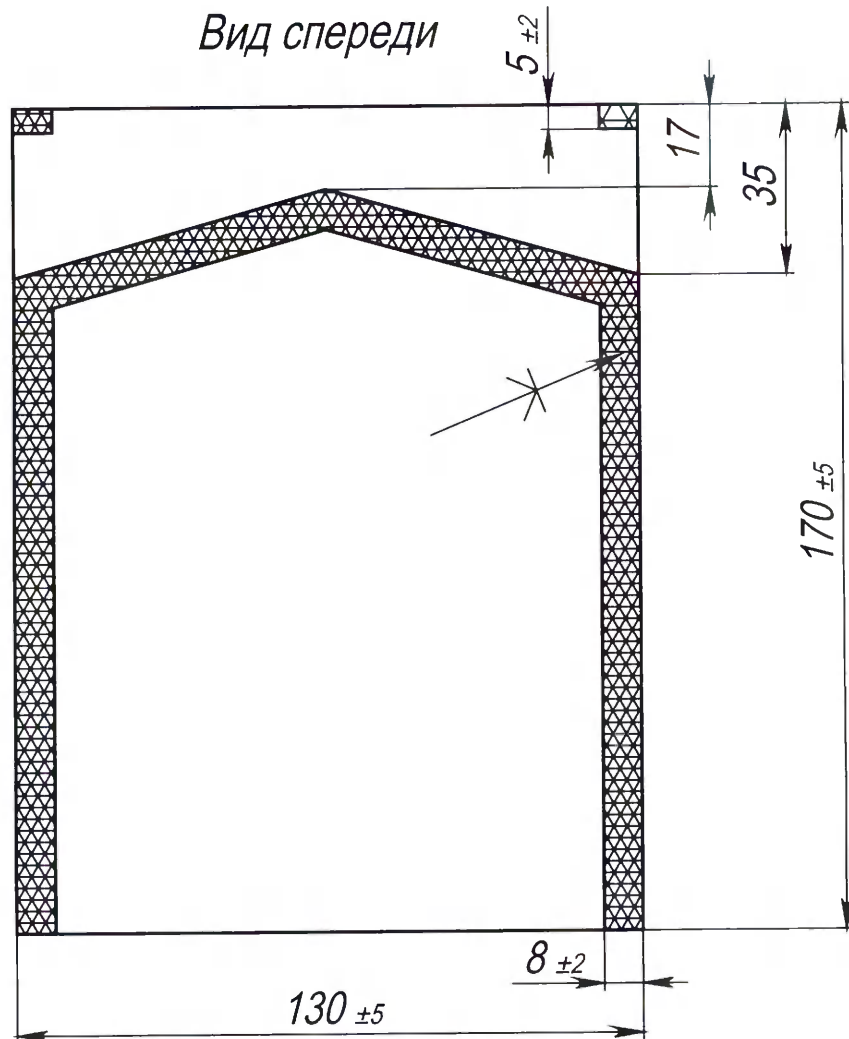

1 H16; h16; $\pm IT/2$.

2 Первая сторона пакета: OPA12/ ALU 9/ PE50

3 Вторая сторона пакета: OPA/ ALU / PE peel

МДЛА.942416.000УЧ7

Барьерная система
для стерилизации

см. тех. требования

Лит.	Масса	Масштаб
	0,037	1:1.5
Лист		Листов 1

ООО "Инмед"

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Забивалова	Юсупов	08.23	
Пров.	Шихова	Юсупов	08.23	
Т. контр.				
Н. контр.	Пятунина	Юсупов	08.23	

Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью 9 лист ов
(девять листов)

Генеральный директор ООО "Инмед"

Савченко С.П.

10 октября 2023 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

«Средство местное гемостатическое стерильное для временной
остановки наружных травматических кровотечений по
ТУ 32.50.50-004-67539369-2017»


Медицинское изделие «Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных
травматических кровотечений по ТУ 32.50.50-004-67539369-2017» размер 7,5 см х 15 см
Общий вид



Медицинское изделие «Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных
травматических кровотечений по ТУ 32.50.50–004-67539369-2017» размер 7,5 см х 150 см с перфорацией
вдоль длины шаг деления 3,25 см и 4,25 см
Общий вид



Медицинское изделие «Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных травматических кровотечений по ТУ 32.50.50-004-67539369-2017» размер 7,5 см х 160 см с перфорацией вдоль длины шаг деления 3,25 см и 4,25 см
Общий вид

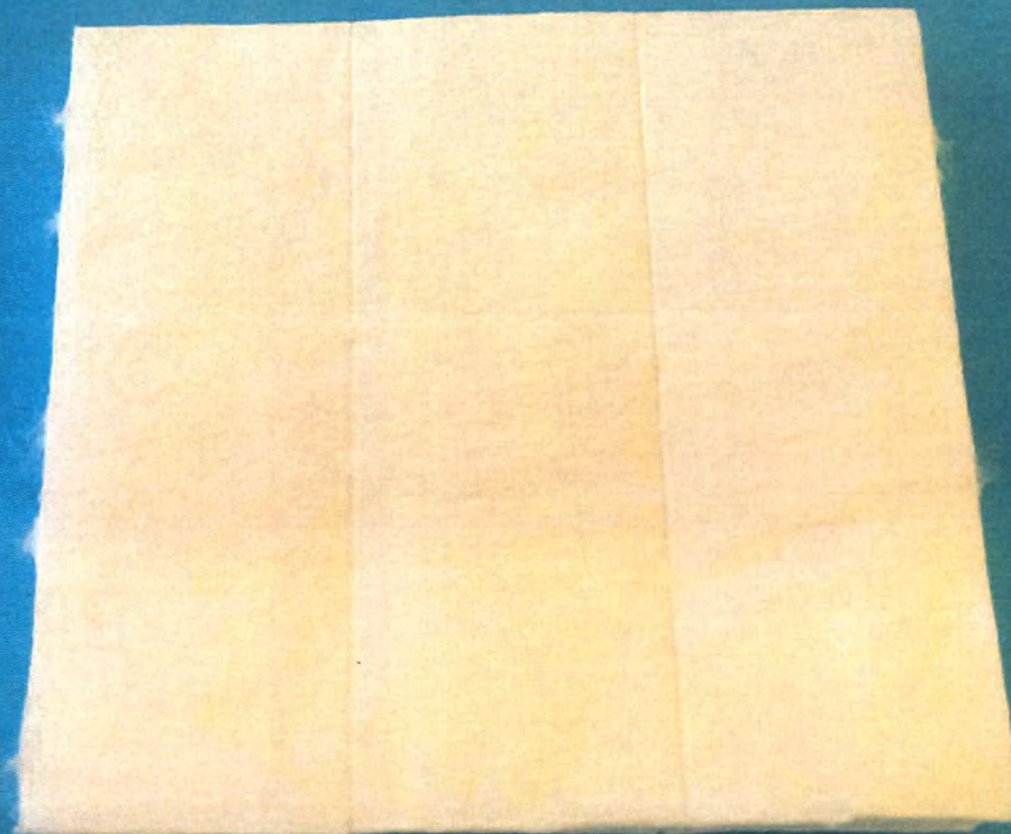

Медицинское изделие «Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных травматических кровотечений по ТУ 32.50.50-004-67539369-2017» размер 7,5 см x 15 см, в барьерной системе для стерилизации

**СРЕДСТВО МЕСТНОЕ
ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ
СТЕРИЛЬНОЕ**


гемофлекс®



7,5 см x 15 см

x1



STERILE R

**ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ
НАРУЖНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ**

**ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ**

Инструкция по применению:



1. Вскройте упаковку, извлеките средство местное гемостатическое стерильное «Гемофлекс®». Перед применением очистите рану от инородных тел. Удалите (промокните) кровь из раны.
2. Плотно затампонируйте с помощью «Гемофлекса®» максимально близко к источнику кровотечения всю область раны. Удостоверьтесь в полном закрытии раны.
3. Осуществите ручную компрессию на область повреждения длительностью не менее 3 минут.
4. Не извлекая «Гемофлекса®», наложите давящую повязку. Остановка кровотечения оценивается визуально, при этом должно отсутствовать подтекание крови через повязку.
5. В случае возобновления кровотечения примените новый «Гемофлекс®» согласно п. 1-4.
6. Обратитесь к врачу для оказания медицинской помощи.

Примечание: По завершении транспортировки пострадавшего в медицинское учреждение «Гемофлекс®» необходимо извлечь из раны в условиях перевязочной или операционной. Количество используемых «Гемофлексов®» для остановки кровотечения неограничено. Нахождение «Гемофлекса®» в ране на этапе транспортировки пострадавшего значительно снижает риск возобновления кровотечения, а также развитие раневой инфекции.

Обладает 100% антимикробным действием в течение 24 часов по отношению к *Staphylococcus aureus*.

Срок годности:

5 лет с даты изготовления

Условия хранения:

+5 ÷ +40°C

Состав: Хитозан, высокодисперсное серебро, полотно нетканое

Назначение:

Для временной остановки наружных травматических, в том числе артериальных кровотечений

Нейтральный вкус

Гемостатический эффект

Антимикробное действие

ТУ 32.50.50-004-67539369-2017

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/9823 от 28.02.2023 года

 **ООО «ИНМЕД»**

198515, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна,
ул. Связи, д. 38 кор. 3, стр. 1

www.hemoflex.ru

Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684-21 для использованных изделий по классу Б, для не использованных изделий по классу А.

Противопоказания:

Не применять при индивидуальной непереносимости используемых компонентов сырья, входящего в состав медицинского изделия

Побочные действия:

Возможна индивидуальная непереносимость используемых компонентов сырья, входящего в состав медицинского изделия



**РАЗРАБОТАНО
И СДЕЛАНО
В РОССИИ**



Дата стерилизации

Медицинское изделие «Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных травматических кровотечений по ТУ 32.50.50-004-67539369-2017» размер 7,5 см x 160 см с перфорацией вдоль длины шаг деления 2,5 см, в барьерной системе для стерилизации

СРЕДСТВО МЕСТНОЕ
ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ
СТЕРИЛЬНОЕ


гемофлекс®



7,5 см x 160 см
с перфорацией вдоль длины
шаг деления 2,5 см
x1



STERILE R

ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ
НАРУЖНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ

ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Инструкция по применению:



1. Вскройте упаковку, извлеките средство местное гемостатическое стерильное «Гемофлекс®». При необходимости разорвите бинт вдоль линии перфорации. Перед применением очистите рану от инородных тел. Удалите (промокните) кровь из раны.
 2. Плотнo затампонируйте с помощью «Гемофлекс®» максимально близко к источнику кровотечения всю область раны. Удостоверьтесь в полном закрытии раны.
 3. Осуществите ручную компрессию на область повреждения длительноcтью не менее 3 минут.
 4. Не извлекая «Гемофлекс®», наложите давящую повязку. Остановка кровотечения оценивается визуально, при этом должно отсутствовать давящая повязка. Остановка кровотечения оценивается визуально, при этом должно отсутствовать подтекание крови через повязку.
 5. В случае возобновления кровотечения примените новый «Гемофлекс®» согласно п. 1-4.
 6. Обратитесь к врачу для оказания медицинской помощи.
- Примечание: По завершении транспортировки пострадавшего в медицинское учреждение «Гемофлекс®» необходимо извлечь из раны в условиях перевязочной или операционной.
- Количество используемых «Гемофлекс®» для остановки кровотечения неограниченно.
- Нахождение «Гемофлекс®» в ране на этапе транспортировки пострадавшего значительно снижает риск возобновления кровотечения, а также развитие раневой инфекции.

Обладает 100% антимикробным действием в течение 24 часов по отношению к *Staphylococcus aureus*.

Срок годности:
5 лет с даты изготовления

Условия хранения:
+5 ÷ +40°C

Противопоказания:
Не применять при индивидуальной непереносимости используемых компонентов сырья, входящего в состав медицинского изделия

Побочные действия:
Возможна индивидуальная непереносимость используемых компонентов сырья, входящего в состав медицинского изделия

Состав: Хитозан, высокодисперсное серебро, полотно нетканое

Назначение:
Для временной остановки наружных травматических, в том числе артериальных кровотечений

Итаксизин (внутри)

Гемостатический эффект

Антимикробное действие

ТУ 32.50.50-004-67539369-2017

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/9823 от 28.02.2023 года

РАЗРАБОТАНО
И СДЕЛАНО
В РОССИИ



ООО «ИНМЕД»
198515, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна,
ул. Связи, д. 38 кор. 3, стр. 1



Дата стерилизации


www.hemoflex.ru

Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684-21: для использованных изделий по классу Б, для не использованных изделий по классу А

Медицинское изделие «Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных травматических кровотечений по ТУ 32.50.50-004-67539369-2017» размер 7,5 см х 160 см с перфорацией вдоль длины шаг деления 3,25 см и 4,25 см, в барьерной системе для стерилизации



Медицинское изделие «Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных травматических кровотечений по ТУ 32.50.50-004-67539369-2017», размер 7,5x15 в транспортной упаковке

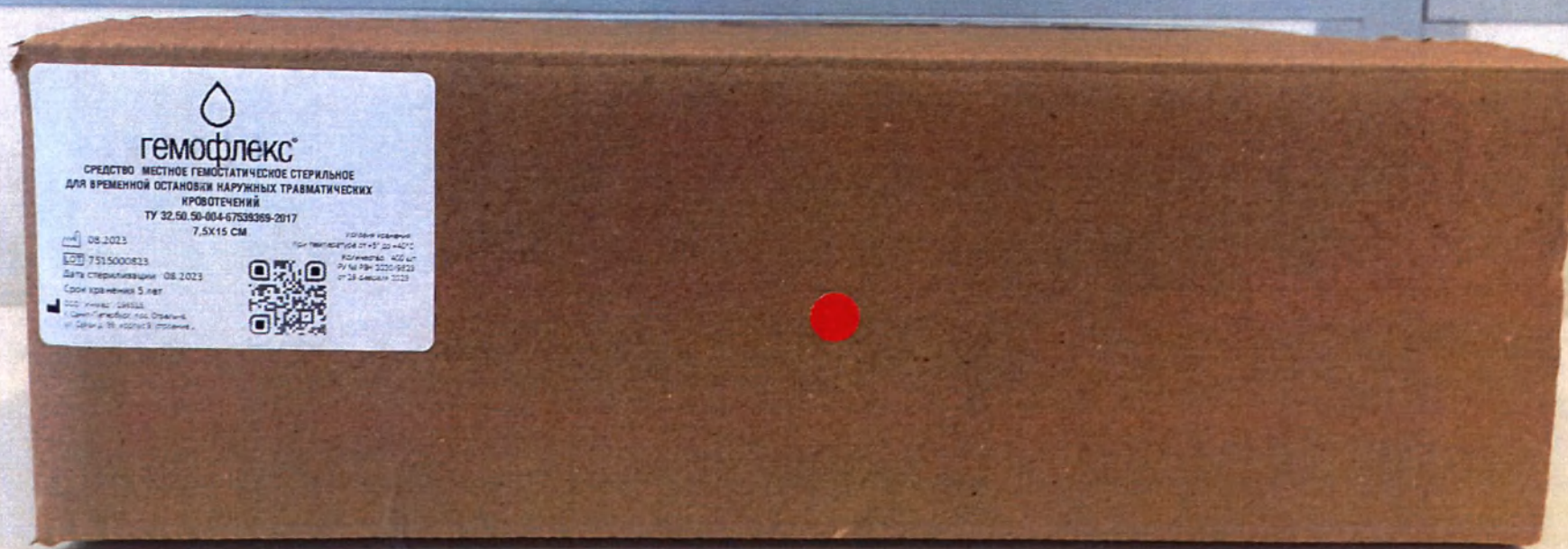

Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью 8 лист ов
(восемь листов)

Генеральный директор ООО "Инмед"

/Савченко С.П./

«17» октября 2023 г.





МАКЕТЫ ЭТИКЕТОК УПАКОВОК

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных
травматических кровотечений по
ТУ 32.50.50–004-67539369-2017»

Санкт-Петербург

2023

**МАКЕТ МАРКИРОВКИ БАРЬЕРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
(размер 170 мм x 130 мм)**

«Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных
травматических кровотечений по
ТУ 32.50.50–004-67539369-2017» размер 7,5 см x 300 см (вид спереди)



МАКЕТ МАРКИРОВКИ БАРЬЕРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (размер 170 мм x 130 мм)

«Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных
травматических кровотечений по
ТУ 32.50.50-004-67539369-2017» размер 7,5 см x 300 см (вид сзади)



Инструкция по применению:

1. Вскройте упаковку, извлеките средство местное гемостатическое стерильное «Гемофлекс». Перед применением очистите рану от инородных тел. Удалите (промойте) кровь из раны.
2. Плотно заимпонируйте с помощью «Гемофлекса» максимально близко к источнику кровотечения всю область раны. Удостоверьтесь в полном загерметизации раны.
3. Осуществите ручную компрессию на область повреждения длительно до полного замирания кровотечения.
4. Не извлекайте «Гемофлекс», наложите давящую повязку. Остановка кровотечения оценивается визуально, при этом должно отсутствовать подтекание крови через повязку.
5. В случае возобновления кровотечения применить новый «Гемофлекс» согласно п. 1-4.
6. Обратитесь к врачу для оказания медицинской помощи.

Примечание: По завершении транспортировки пострадавшего в медицинское учреждение «Гемофлекс» необходимо извлечь из раны в условиях перевязочной или операционной. Количество используемых «Гемофлексов» для остановки кровотечения неограничено. Извлечение «Гемофлексов» из раны на этапе транспортировки пострадавшего значительно снижает риск возобновления кровотечения, а также развития раневой инфекции.

Обладает 100% антибактериальным действием в течение 24 часов по отношению к *Staphylococcus aureus*

Срок годности: 5 лет с даты изготовления	Противопоказания: Не применять при индивидуальной непереносимости используемых компонентов сырья, входящего в состав медицинского изделия
Условия хранения: +5 ÷ +40°C	Побочный эффект: Возможна индивидуальная непереносимость используемых компонентов сырья, входящего в состав медицинского изделия

Состав: Хитозан, высокодисперсное серебро, полиэфир нетканый

Назначение:
Для временной остановки наружных травматических, в том числе артериальных кровотечений

Находится внутри Пенокартонной системы Антибактериальное действие

ТУ 32.50.50-004-67539369-2017
Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/9823 от 28 февраля 2023 года

**РАЗРАБОТАНО
И СДЕЛАНО
В РОССИИ**

**ООО «ИМЕД»**
198515, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна,
ул. Саян, д. 38, корпус 3, строение 1
www.hemoflex.ru


Дополнительная информация



Упаковка изготовлена из полипропилена (ПП) для обеспечения стерильности по классу В, для обеспечения стерильности по классу А.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ БАРЬЕРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

(размер 130 мм x 107 мм)

«Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных
травматических кровотечений по
ТУ 32.50.50–004-67539369-2017» размер 7,5 см x 150 см (вид спереди)



МАКЕТ МАРКИРОВКИ БАРЬЕРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

(размер 130 мм x 107 мм)

«Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных
травматических кровотечений по

ТУ 32.50.50–004-67539369-2017» размер 7,5 см x 150 см (вид сзади)

Инструкция по применению:

1. Вскройте упаковку, извлеките средство местное гемостатическое стерильное «Гемофлекс®».
2. Перед применением очистите рану от инородных тел. Удалите (промокните) кровь из раны.
3. Плотно затмпонируйте с помощью «Гемофлекса®» максимально близко к источнику кровотечения всю область раны. Удостоверьтесь в полном закрытии раны.
4. Осуществите ручную компрессию на область повреждения длительно не менее 3 минут.
5. Не извлекая «Гемофлекса®», наложите давящую повязку. Остановка кровотечения оценивается визуально, при этом должно отсутствовать подтекание крови через повязку.
6. В случае возобновления кровотечения примените новый «Гемофлекс®» согласно п. 1-4.
6. Обратитесь к врачу для оказания медицинской помощи.

Примечание: По завершении транспортировки пострадавшего в медицинское учреждение «Гемофлекс®» необходимо извлечь из раны в условиях перчаточной или операционной. Количество используемых «Гемофлексов®» для остановки кровотечения неограничено. Нахождение «Гемофлекса®» в ране на этапе транспортировки пострадавшего значительно снижает риск возобновления кровотечения, а также развитие раневой инфекции.

Обладает 100% антимикробным действием в течение 24 часов по отношению к *Staphylococcus aureus*.

Срок годности:
5 лет с даты изготовления

Условия хранения:
+5 ÷ +40 °С

Состав: Хитозан, высокодисперсное серебро, полотно нетканое

Назначение:
Для временной остановки наружных травматических, в том числе артериальных кровотечений

Гемостатический эффект Антимикробное действие

ТУ 32.50.50–004-67539369-2017

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/9823 от 28.02.2023 года

**РАЗРАБОТАНО
И СДЕЛАНО
В РОССИИ**



ООО «ИНМЕД»
198515, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна,
ул. Связи, д. 38 кор. 3, стр. 1

LOT


www.hemoflex.ru

Дата стерилизации

Упаковка согласно СанПиН 2.1.36.84-21 для использования изделий по классу Б, для нестерильных изделий по классу А.

**МАКЕТ МАРКИРОВКИ БАРЬЕРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
(размер 130 мм x 107 мм)**

«Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных
травматических кровотечений по
ТУ 32.50.50–004-67539369-2017» размер 7,5 см x 160 см с перфорацией вдоль длины
шаг деления 2,5 см (вид спереди)

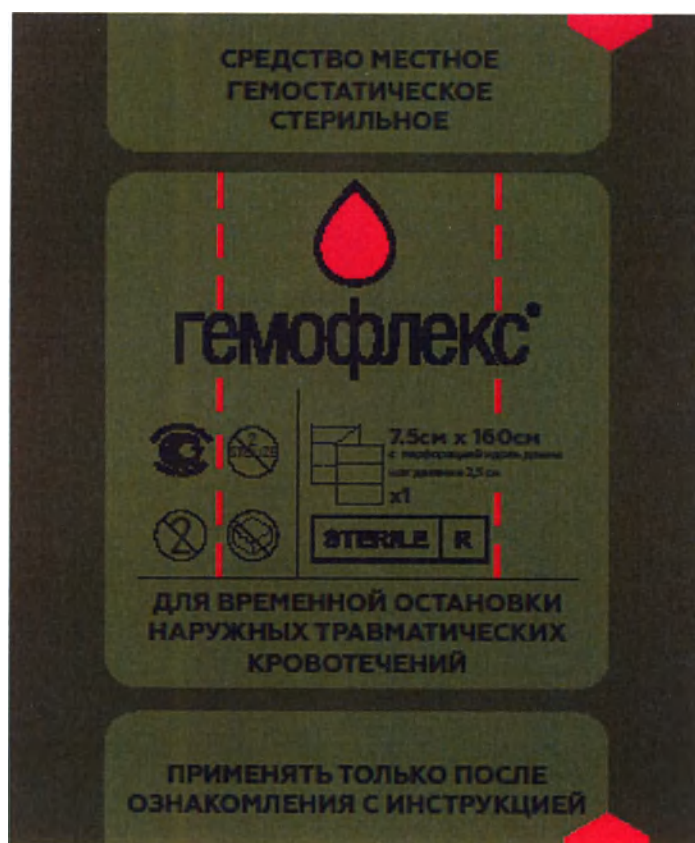

МАКЕТ МАРКИРОВКИ БАРЬЕРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

(размер 130 мм x 107 мм)

«Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных
травматических кровотечений по
ТУ 32.50.50–004-67539369-2017» размер 7,5 см x 160 см с перфорацией вдоль длины
шаг деления 2,5 см (вид сзади)

Инструкция по применению:

1. Вскройте упаковку, извлеките средство местное гемостатическое стерильное «Гемофлекс®». При необходимости разрежьте бинт вдоль линии перфорации. Перед применением очистите рану от инородных тел. Удалите (промокните) кровь из раны.
2. Плотно приложите «Гемофлекс®» непосредственно к источнику кровотечения всю область раны. Удостоверьтесь в полном закрытии раны.
3. Осуществите ручную компрессию на области повреждения длительностью не менее 3 минут.
4. Не извлекайте «Гемофлекс®», наложите давящую повязку. Остановка кровотечения оценивается визуально, при этом должно отсутствовать подтекание крови через повязку.
5. В случае возобновления кровотечения приложите новый «Гемофлекс®» согласно п. 1-4.
6. Обратитесь к врачу для оказания медицинской помощи.

Примечание: По завершении транспортировки пострадавшего в медицинское учреждение «Гемофлекс®» необходимо извлечь из раны в условиях плановой или экстренной операции.
Комплект из двух «Гемофлекс®» для остановки кровотечения неограниченно.
Наличие «Гемофлекс®» в ране на этапе транспортировки пострадавшего значительно снижает риск возобновления кровотечения, а также развитие раневой инфекции.

Обладает 100% антимикробным действием в течение 24 часов по отношению к *Staphylococcus aureus*.

Срок годности:
5 лет с даты изготовления

Условия хранения:
+5 ÷ +40°C

Состав: Хитозан, высокодисперсное серебро, полотно нетканое

Назначение:
Для временной остановки наружных травматических, в том числе артериальных кровотечений

Цитостатическое действие Гемостатический эффект Антимикробное действие

ТУ 32.50.50–004-67539369-2017

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/9823 от 28.02.2023 года

**РАЗРАБОТАНО
И СДЕЛАНО
В РОССИИ**



ООО «ИНМЕД»
198515, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна,
ул. Связи, д. 38 кор. 3, стр. 1



www.hemoflex.ru

ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Утилизация согласно СМТН 21.3684-28 для использованных изделий по классу Б, для неиспользованных изделий по классу А.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ БАРЬЕРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

(размер 130 мм x 107 мм)

«Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных
травматических кровотечений по
ТУ 32.50.50–004-67539369-2017» размер 7,5 см x 160 см с перфорацией вдоль длины
шаг деления 3,25 см и 4,25 см (вид спереди)



МАКЕТ МАРКИРОВКИ БАРЬЕРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

(размер 130 мм x 107 мм)

«Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных
травматических кровотечений по
ТУ 32.50.50–004-67539369-2017» размер 7,5 см x 160 см с перфорацией вдоль длины
шаг деления 3,25 см и 4,25 см (вид сзади)

Инструкция по применению:

1. Вскройте упаковку, извлеките средство местное гемостатическое стерильное «Гемофлекс®». При необходимости разрежьте бинт вдоль линии перфорации. Перед применением очистите рану от инородных тел. Удалите (промокните) кровь из раны.
2. Плотно приложите «Гемофлекс®» на максимально близко к источнику кровотечения всю область раны. Удостоверьтесь в полном закрытии раны.
3. Осуществите ручную компрессию на область повреждения длительностью не менее 3 минут.
4. Не извлекайте «Гемофлекс®», наложите давящую повязку. Остановка кровотечения оценивается визуально, при этом должно отсутствовать подтекание крови через повязку.
5. В случае возобновления кровотечения примените новый «Гемофлекс®» согласно п. 1-4.
6. Обратитесь к врачу для оказания Медицинской помощи.

Примечание: По завершении транспортировки пострадавшего в медицинское учреждение «Гемофлекс®» необходимо извлечь из раны в условиях переносной или операционной. Количество используемых «Гемофлекс®» для остановки кровотечения неограниченно. Нахождение «Гемофлекс®» в ране на этапе транспортировки пострадавшего значительно снижает риск возобновления кровотечения, а также развития раневой инфекции.

Обладает 100% антимикробным действием в течение 24 часов по отношению к *Staphylococcus aureus*.

Срок годности:
5 лет с даты изготовления

Условия хранения:
+5 ÷ +40°C

Состав: Хитозан, высокодисперсное серебро, полотно нетканое

Назначение:
Для временной остановки наружных травматических, в том числе артериальных кровотечений

Потребность: внутренняя **Специфический эффект:** **Ограничивающее воздействие:**

ТУ 32.50.50-004-67539369-2017

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/9823 от 28.02.2023 года

**РАЗРАБОТАНО
И СДЕЛАНО
В РОССИИ**



ООО «ИНМЕД»
198515, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна,
ул. Связи, д. 38 кор. 3, стр. 1

LOT

www.hemoflex.ru

Дата стерилизации

Утилизация согласно СанПиН 1.3.3864-18 для использованных изделий по классу Б, для не использованных изделий по классу А.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ БАРЬЕРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

(размер 130 мм x 107 мм)

«Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных
травматических кровотечений по
ТУ 32.50.50–004-67539369-2017» размер 7,5 см x 15 см (вид спереди)



МАКЕТ МАРКИРОВКИ БАРЬЕРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

(размер 130 мм x 107 мм)

«Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных
травматических кровотечений по
ТУ 32.50.50–004-67539369-2017» размер 7,5 см x 15 см (вид сзади)

Инструкция по применению:

1. Вскройте упаковку, извлеките средство местное гемостатическое стерильное «Гемофлекс®».
2. Перед применением очистите рану от инородных тел. Удалите (промокните) кровь из раны.
3. Полностью затампонируйте с помощью «Гемофлекса®» максимально близко к источнику кровотечения всю область раны. Удостоверьтесь в полном закрытии раны.
4. Осуществите ручную компрессию на область повреждения длительностью не менее 3 минут.
5. Не извлекайте «Гемофлекс®», наложите давящую повязку. Остановка кровотечения оценивается визуально, при этом должно отсутствовать подтекание крови через повязку.
6. В случае возобновления кровотечения примените новый «Гемофлекс®» согласно п. 1-4.
6. Обратитесь к врачу для оказания медицинской помощи.

Примечание: По завершении транспортировки пострадавшего в медицинское учреждение «Гемофлекс®» необходимо извлечь из раны в условиях пересеченной или операционной. Количество используемых «Гемофлексов®» для остановки кровотечения неограничено. Нахождение «Гемофлексов®» в ране на этапе транспортировки пострадавшего значительно снижает риск возобновления кровотечения, а также развитие раневой инфекции.

Обладает 100% антибактериальным действием в течение 24 часов по отношению к *Staphylococcus aureus*.

Срок годности:
5 лет с даты изготовления

Условия хранения:
+5 ÷ +40°C

Состав: Хитозан, высокодисперсное серебро, полотно нетканое

Назначение:
Для временной остановки наружных травматических, в том числе артериальных кровотечений

Противопоказания:
Не применять при наличии тяжелой непереносимости компонентов, входящих в состав медицинского изделия

Побочные действия:
Повышенная индивидуальная непереносимость ингредиентов: клонидина гидрохлорид, вазелинового масла, вазелинового порошка, вазелинового масла

Незаменимо, эффективно, безопасно, надежно

ТУ 32.50.50-004-67539369-2017

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2020/9823 от 28.02.2023 года

РАЗРАБОТАНО
И СДЕЛАНО
В РОССИИ

ООО «ИНМЕД»
198515, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна,
ул. Связи, д. 38 кор. 3, стр. 1

www.hemoflex.ru

Утилизатор региона Святии 23.3694-28 для использования изделий по классу Б, для нестерилизованных изделий по классу А.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ БАРЬЕРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

(размер 225 мм x 150 мм)

«Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных
травматических кровотечений по
ТУ 32.50.50–004-67539369-2017» размер 10 см x 300 см (вид спереди)



МАКЕТ МАРКИРОВКИ БАРЬЕРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (размер 225 мм x 150 мм)

«Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных
травматических кровотечений по
ТУ 32.50.50–004-67539369-2017» размер 10 см x 300 см (вид сзади)



Инструкция по применению:

1. Вскройте упаковку, извлеките средство местное гемостатическое стерильное «Гемофлекс®». Перед применением очистите рану от инородных тел. Удалите (промокните) кровь из раны.
2. Плотно затампонируйте с помощью «Гемофлекс®» максимально близко к источнику кровотечения всю область раны. Удостоверьтесь в полном закрытии раны.
3. Осуществите ручную компрессию на область повреждения длительностью не менее 3 минут.
4. Не извлекая «Гемофлекс®», наложите давящую повязку. Остановка кровотечения оценивается визуально, при этом должно отсутствовать подтекание крови через повязку.
5. В случае возобновления кровотечения примените новый «Гемофлекс®» согласно п. 1-4.
6. Обратитесь к врачу для оказания медицинской помощи.

Примечание: По завершении транспортировки пострадавшего в медицинское учреждение Гемофлекс необходимо извлечь из раны в условиях перевязочной или операционной. Количество используемых «Гемофлекс®» для остановки кровотечения неограниченно. Нахождение «Гемофлекс®» в ране на этапе транспортировки пострадавшего значительно снижает риск возобновления кровотечения, а также развития раневой инфекции.

Обладает 100% антимикробным действием в течение 24 часов по отношению к *Staphylococcus aureus*

Срок годности: 5 лет с даты изготовления	Противопоказания: Не применять при индивидуальной непереносимости используемых компонентов сырья, входящего в состав медицинского изделия		
Условия хранения: +5 ÷ +40°C	Побочные действия: Возможна индивидуальная непереносимость используемых компонентов сырья, входящего в состав медицинского изделия		
Состав: Хитозан, высокодисперсное серебро, полотно нетканое			
Назначение: Для временной остановки наружных травматических, в том числе артериальных кровотечений			
Нетоксично внутри	Гемостатический эффект	Антимикробное действие	
ТУ 32.50.50-004-67539369-2017 Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9823 от 28 февраля 2023 года		РАЗРАБОТАНО И СДЕЛАНО В РОССИИ	

ООО «ИНМЕД»
 198515, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна,
 ул. Связи, д. 38, корпус 3, строение 1
www.hemoflex.ru




Дата стерилизации

Упаковка согласно СанПин 21.3584-21 для использования изделий по классу Б, для не использованных изделий по классу А.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных травматических кровотечений по ТУ 32.50.50–004-67539369-2017», размер 10 см х 150 см

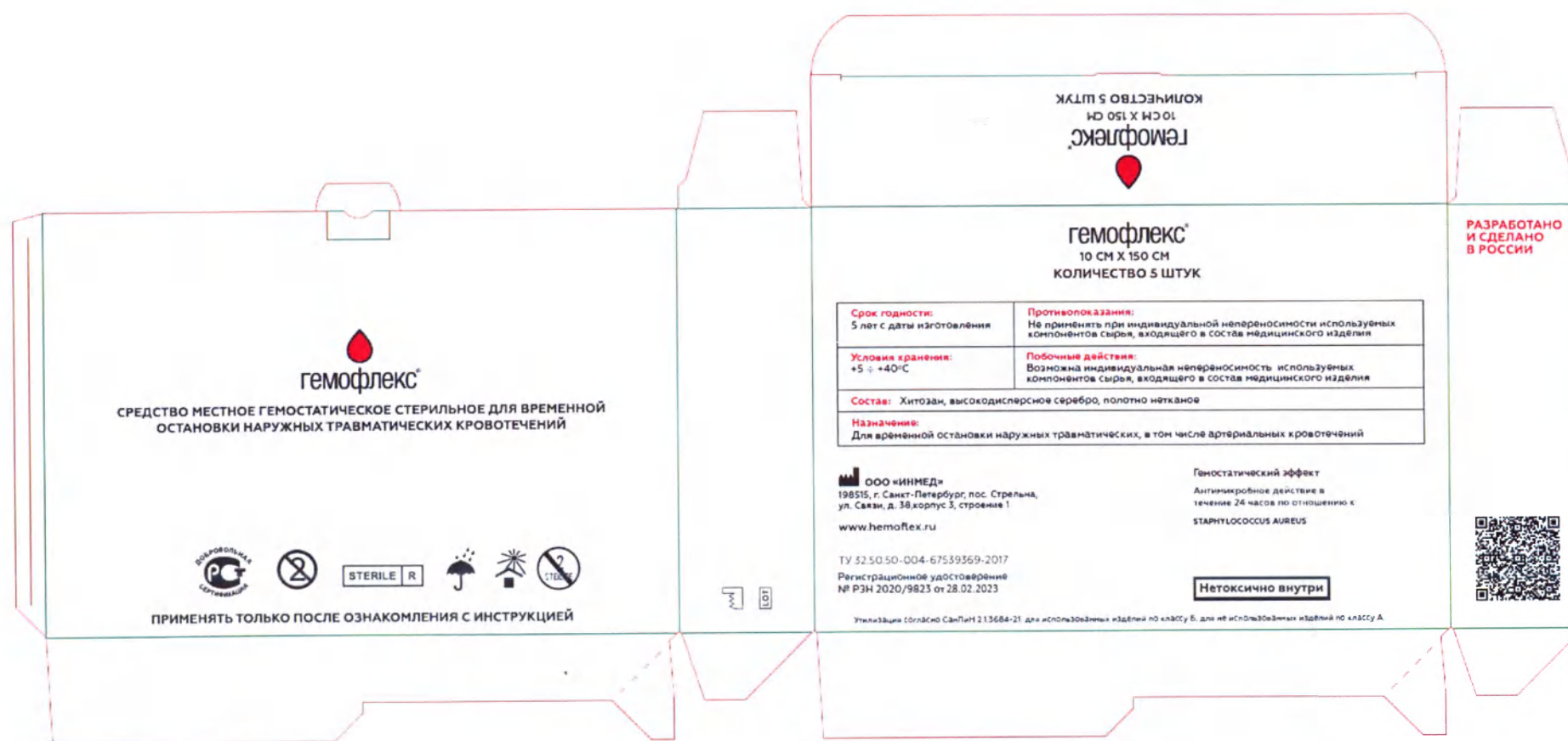

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Средство местное гемостатическое стерильное для временной остановки наружных
травматических кровотечений по
ТУ 32.50.50-004-67539369-2017»



гемофлекс®

СРЕДСТВО МЕСТНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СТЕРИЛЬНОЕ
ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ

ТУ 32.50.50-004-67539369-2017

7,5X15 CM



LOT

Дата стерилизации
Срок хранения 5 лет



ООО "Инмед", 198515,
г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна,
ул. Связи д. 38, корпус 3, строение 1



условия хранения:
при температуре
от +5° до +40°C

Количество: шт.
РУ № РЗН 2020/9828
от 28 февраля 2023



гемофлекс®

СРЕДСТВО МЕСТНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СТЕРИЛЬНОЕ
ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ

ТУ 32.50.50-004-67539369-2017

7,5X160 CM с перфорацией вдоль
длины шаг деления 2,5 см



LOT

Дата стерилизации
Срок хранения 5 лет

ООО "Инмед", 198515,
г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна,
ул. Связи д. 38, корпус 3, строение 1



условия хранения:
при температуре
от +5° до +40°C

Количество: шт.
РУ № РЗН 2020/9828
от 28 февраля 2023



гемофлекс®

СРЕДСТВО МЕСТНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СТЕРИЛЬНОЕ
ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ

ТУ 32.50.50-004-67539369-2017

7,5X160 CM с перфорацией вдоль
длины шаг деления 3,25 см и 4,25 см



LOT

Дата стерилизации
Срок хранения 5 лет

ООО "Инмед", 198515,
г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна,
ул. Связи д. 38, корпус 3, строение 1



условия хранения:
при температуре
от +5° до +40°C

Количество: шт.
РУ № РЗН 2020/9828
от 28 февраля 2023

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 15 лист ов
(пятидцать листов)
Генеральный директор ООО "Инмед"
Савченко С.П. /Савченко С.П./
Савченко 2023 г.

