

ООО «МегаМед Корпорэйшн»

Аппарат электрохирургический высокочастотный

Surtron FLASH 160 HF

Приложение 1

Фотографические изображения

(инструменты электрохирургические, входящие в стандартную комплектацию и в состав медицинского изделия опционально (с пометкой «при необходимости»))

Производства LED S.p.A., Италия

2024 г.

Электрод нейтральный

REF 00401.02

LOT 65832

2019-05

Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 160x120мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора - типа Jack Ø6,3мм, автоклавируемый

121 °C 17% ALUCOLITE 20 лет

134 °C 17% ALUCOLITE 10 лет

100 CYCLES

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

- Вся поверхность электрода излучения излучения нейтрального должна быть размещена на хорошо васкуляризованной мышце, как можно ближе к оперируемому участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, пролежнями, рубцами и частями тела, которые подверглись наложению жидкости или имеют подкожную жировую ткань. Кожа тела должна быть без волос, сухой и чистой. Не используйте спирт для очистки кожи. Не рекомендуется использовать жепатиозные вещества для электрода.

1A03401 02 12 Ed. 10-2017


8 033 638 521430

(1) - зона терапии

• Если аппарат электрохирургический не производит желаемый эффект, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы аппарата электрохирургического, при настройке на нормальное значение выходной мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального или его неправильное расположение.

CE 0051

LED SpA Via Salsabella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

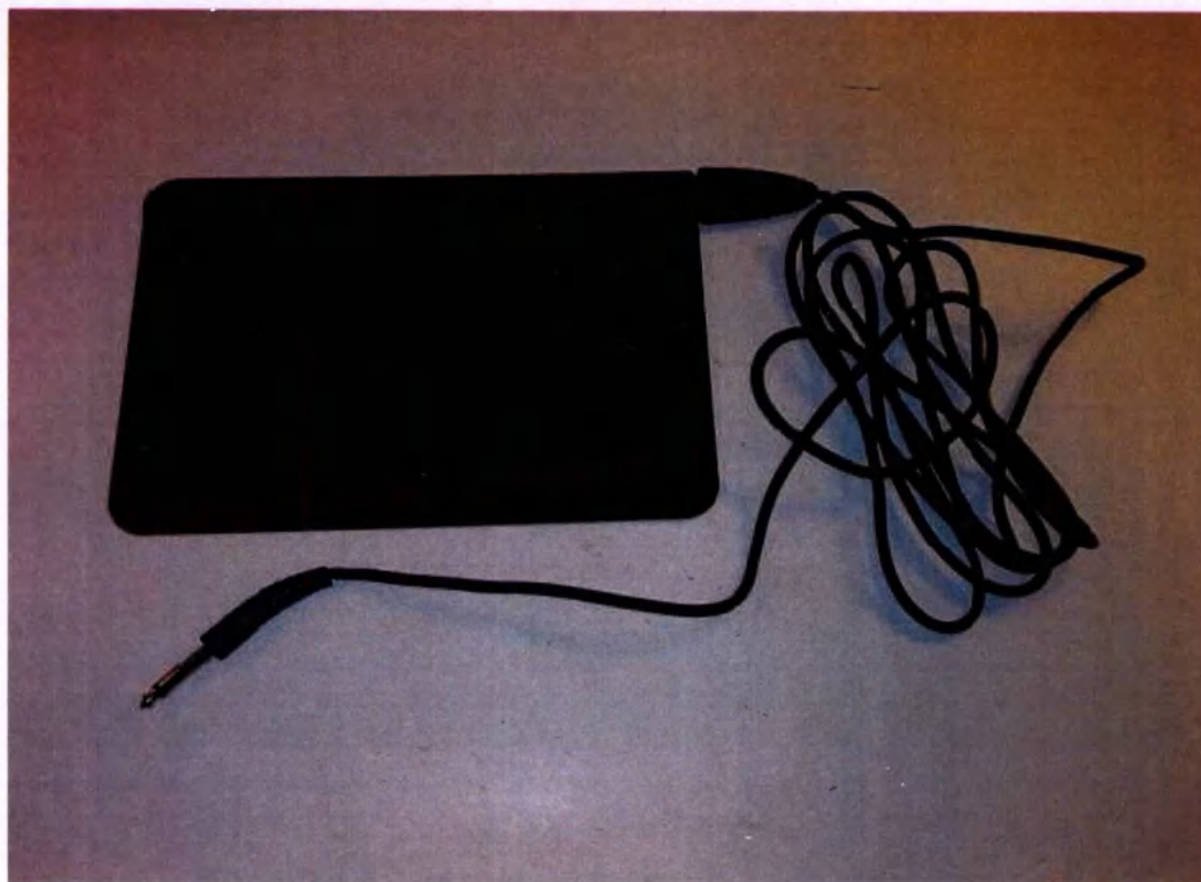

1. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 160x120мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора - типа Jack Ø6,3мм, автоклавируемый, 00401.02. Фото изделия и пример маркировки.

Электрод нейтральный

Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 240x160мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора - типа Jack Ø6,3мм, автоклавируемый

REF 00401.03
LOT 68787
2019-09

131 °C
275 °F
AUTCLAVE
20 min


134 °C
275 °F
AUTCLAVE
10 min

100 CYCLES

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

- Вся поверхность электрода пациента возвратного нейтрального должна быть размещена на хорошо васкуляризированной мышце, как можно ближе к оперируемому участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, протезами, рубцами и частями тела, которые подвергнуты накоплению жира или имеют подкожную жировую ткань. Часть тела должна быть без волос, сухой и чистой. Не используйте спирт для очистки кожи. Не рекомендуется использовать желатиновые вещества для электродов.

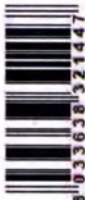

8 033638 321447



(1) - зона терапии

1A00401-03 12 ed. 10-2017

CE 0051

LED SpA Via Seicidella 40
04011 Aprila (LT) - ITALY




• Если аппарат электрофизиологический не производит желаемый эффект, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы аппарата электрофизиологического, при настройке на нормальное значение выходной мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального или его неправильное расположение.



2. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 240x160мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора - типа Jack Ø6,3мм, автоклавируемый, 00401.03. Фото изделия и пример маркировки.

Электрод
нейтральный

REF 5365A
LOT C4015/18
2018-09

Электрод пациента возвратный нейтральный
нейтральный стальной 160x120мм
с язычковым соединением

150 °C
37,5 °C
20 мин
10 мин

Совместим с 80404.08

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

* Все поверхности электрода пациента возвратного нейтрального должны быть размещены на хорошо васкуляризованной мышце, как можно ближе к операционному участку в плотном контакте с телом пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, артериями, рубцами и чистыми телами, которые подвержены накоплению влаги или имеют подтянутую жирную ткань. Чистый тел должен быть без волос, сухой и чистой. Не используйте спирт для очистки кожи. Не рекомендуется использовать жидкие вещества для электрода.

MA5365_L2 ed. 10-2017

(1) зона терапии

8 033 638 322 263

CE 0051

LED SpA Via Solistella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

MADE IN ITALY

* Если интратерапевтический не исключает жалобный эффект, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы электротерапевтического аппарата, при отсутствии на нормальное значение выходной мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального или его неправильное расположение.

3. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 160x120мм с язычковым соединением, 5365A. Фото изделия и пример маркировки.

Электрод
нейтральный

REF 6420A
LOT C2417
2017-04

Электрод пациента возвратный нейтральный
нейтральный стальной 240x160мм
с язычковым соединением

121 °C
250 °F
20 min

134 °C
275 °F
10 min

Счетчик с 00004.06

Перед первым использованием снимите защитную пленку

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск лучевой опасности

- Вся поверхность электрода пациента возвратного нейтрального должна быть размещена на хорошо вентилируемой поверхности, как можно ближе к операционному участку в тесном прикосновении к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, протезами, рубцами и частями тела, которые подвержены воздействию жидкости или имеют подкожную жировую ткань. Частички пыли должны быть без видимой пыли в чистом. Не используйте спирт для очистки. Не рекомендуется использовать желатиновые вещества для электрода.

MS305_2 ed. 10-2017

(1) - зона терапии

8 0 3 3 6 3 8 3 2 2 2 5 3

CE 0051

LED SpA Via Selicella 40
04011 Aprica (LT) - ITALY

QR code

Если активный электрофизиологический не происходит активной афферент, следует проверить электрод пациента возвратного нейтрального. Пациентом должно быть обеспечено ватной повязкой или некоррозийной работы электрофизиологического аппарата, при наложении на нормальное значение ватной повязкой, может быть отсутствовать контакт электрода с кожей пациента, что может привести к неправильному расположению.

4. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 240x160мм с язычковым соединением, 6429A. Фото изделия и пример маркировки.



Электрод нейтральный

Электрод пациента возвратный нейтральный с TPE покрытием 210x120мм с язычковым соединением

REF 00401.10

LOT 68417

2019-10

2024-10

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

- Вся поверхность электрода пациента возвратного нейтрального должна быть размещена на хорошо васкуляризованной мышце, как можно ближе к оперируемому участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, протезами, рубцами и частями тела, которые подвержены накоплению жидкости или имеют подкожную жировую ткань. Часть тела должна быть без волос, сухой и чистой. Не используйте спирт для очистки кожи. Не рекомендуется использовать желатиновые вещества для электродов.

8 0 3 3 6 3 8 3 2 2 5 3

(1) - зона терапии

• Если аппарат электрофизиологический не производит желаемый эффект, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы электрофизиологического аппарата, при настройке на нормальное значение выходной мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального или его неправильное расположение.

CE 0051

LED SpA Via Seiciatella 40
04011 Aprila (LT) - ITALY

5. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной с TPE покрытием 210x120мм с язычковым соединением, 00401.10. Фото изделия и пример маркировки.

Электрод
нейтральный

REF 00401.20
LOT 68418
2019-10
2024-10

Электрод пациента возвратный нейтральный
нейтральный стальной с ТРЕ покрытием
разделенный 210x120мм с язычковым соединением

134 °C
250 °C
100 cycles

134 °C
250 °C
100 cycles

134 °C
250 °C
100 cycles

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов:

- Вся поверхность электрода пациента возвратного нейтрального должна быть размещена на хорошо васкуляризованной коже, как можно ближе к оперируемой области и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, пролежнями, рубцами и частями тела, которые подвержены наложению жидкостей или имеют повышенную жирную ткань. Нельзя трогать датчик без кожи, ошей и чистоты. Не используйте электрод для очистки кожи. Не рекомендуется использовать желатиновые вещества для электрода.




8 33 63 8 322 53

(1) - зона терапии

Если аппарат электрофизиологический не производит желаемый эффект, следует проверить электрод пациента возвратного нейтрального. Проверкой можно усилить выходной импульсы или перерезать работы электрофизиологического аппарата, при наложении на нормальное значение выходной мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального или его неправильное расположение.

CE 0051

LCD SpA Via Salsola 40
04011 Aprila (LT) - ITALY



6. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной с ТРЕ покрытием разделенный 210x120 мм с язычковым соединением, 00401.20. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-110 *Электрод-лезвие, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм*
 EAN13 8033638323373

LOT 68346 2019-09 2024-09

NON STERILE
 30 CYCLES
 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min
 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

CE 0051 LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

7. Электрод-лезвие, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-110. Фото изделия и пример маркировки.



Электрод

REF 152-112 *Электрод-лезвие изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм*
 EAN13 8033638323380

LOT 61825 2018-08 2023-08

NON STERILE
 30 CYCLES
 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min
 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

CE 0051 LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

8. Электрод-лезвие изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-112. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-115
EAN13 8033638323403

LOT 65348

Электрод-лезвие, длина стержня 160мм,
посадочный диаметр 2,4 мм

2019-03

2024-03

NON
STERILE

CICLI
30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

9. Электрод-лезвие, длина стержня 160мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-115. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-120
EAN13 8033638323410

LOT 68930

Электрод-игла, длина стержня 70мм,
посадочный диаметр 2,4 мм

2019-10

2024-10

NON
STERILE

CICLI
30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

10. Электрод-игла, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-120. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД	
REF 152-122	Электрод-игла изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм
EAN13 8033638323427	
LOT 60945	2018-03 2023-03
NON STERILE	CICLI 30 CYCLES
121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min	134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min
CE 0051	LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY
QR CODE	

11. Электрод-игла изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-122. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД	
REF 152-125	Электрод-игла, длина стержня 130мм, посадочный диаметр 2,4 мм
EAN13 8033638323434	
LOT 60946	2018-03 2023-03
NON STERILE	CICLI 30 CYCLES
121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min	134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min
CE 0051	LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY
QR CODE	

12. Электрод-игла, длина стержня 130мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-125. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-130 *Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323441

LOT 61022 2018-08 2023-08

NON STERILE CICLI 30 CYCLES 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

0051 LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

13. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-130. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-132 *Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323458

LOT 65402 2019-03 2024-03

NON STERILE CICLI 30 CYCLES 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

0051 LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

14. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-132. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-140 *Электрод-шар, длина стержня 60мм,
диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм*
EAN13 8033638323465

LOT 60949 2018-03 2023-03

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

15. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-140. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-142 *Электрод-шар изогнутый, длина стержня 50мм,
диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм*
EAN13 8033638323472

LOT 60950 2018-03 2023-03

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

16. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 50мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-142. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-145 *Электрод-шар, длина стержня 140мм,
диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм*
EAN13 8033638323489

LOT 60951  2018-03  2023-03

 **NON STERILE**  **CICLI 30 CYCLES**  **121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min**  **134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min**

 **0051**  **LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY**  

17. Электрод-шар, длина стержня 140мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-145. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-150 *Электрод-шар, длина стержня 60мм,
диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм*
EAN13 8033638323496

LOT 68516  2019-10  2024-10

 **NON STERILE**  **CICLI 30 CYCLES**  **121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min**  **134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min**

 **0051**  **LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY**  

18. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-150. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-152

EAN13 8033638323502

LOT 60953

Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм

2018-03
 2023-03

NON
STERILE

CICLI
30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

CE
0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

19. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-152. Фото изделия и пример маркировки

ЭЛЕКТРОД

REF 152-160

EAN13 8033638323519

LOT 60954

Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм

2018-03
 2023-03

NON
STERILE

CICLI
30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

CE
0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

20. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-160. Фото изделия и пример маркировки

14

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ЭЛЕКТРОД

REF 152-162 *Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323526

LOT 60955 2018-03 2023-03

LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

21. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-162. Фото изделия и пример маркировки




ЭЛЕКТРОД

REF 152-165 *Электрод-шар, длина стержня 140мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323533

LOT 60956 2018-03 2023-03

LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

22. Электрод-шар, длина стержня 140мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-165. Фото изделия и пример маркировки

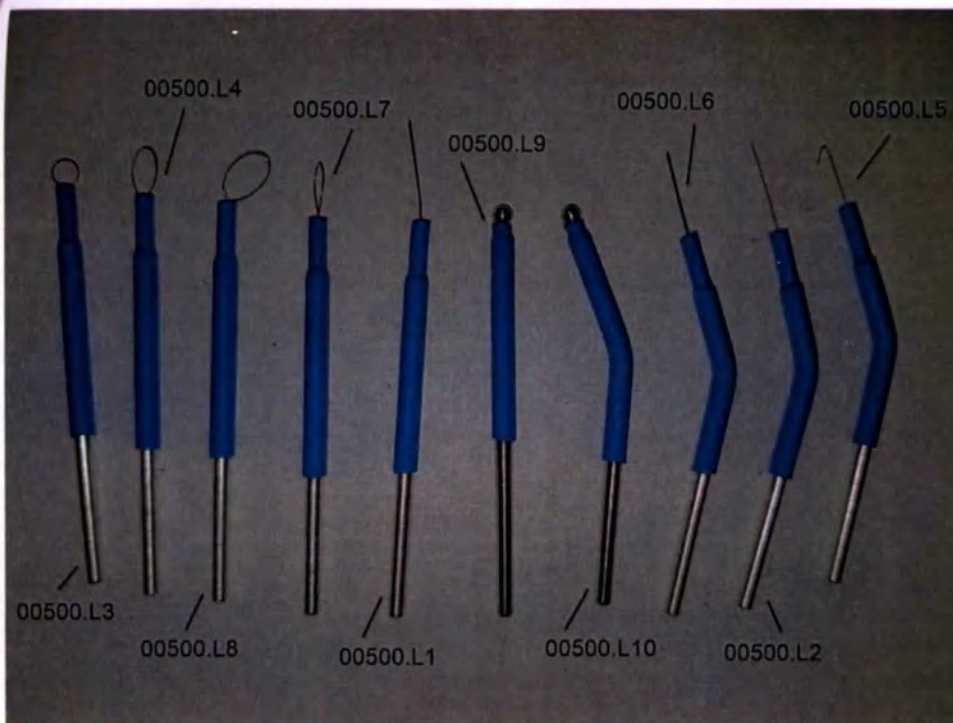

ЭЛЕКТРОД

REF 00500.00 Набор электродов (10 шт., длина стержня 50мм, посадочный диаметр 2,4мм)

EAN13 8033638322277

LOT 65411 2019-03 2024-03

NON
STERILE

CICLI
30
CYCLES

134 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °F
AUTOCLAVE
10 min

CE 0051 **LED SpA** Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

ЭЛЕКТРОД

Набор электродов (10 шт., длина стержня 50мм, посадочный диаметр 2,4мм) в составе:

Электрод проволоочный тонкий прямой, 00500.L1 – 1 шт.;

Электрод проволоочный тонкий изогнутый, 00500.L2 – 1 шт.;

Электрод-петля, диаметр 4мм, 00500.L3 – 1 шт.;

Электрод -петля, диаметр 8мм, 00500.L4 – 1 шт.;

Электрод-крючок изогнутый, 00500.L5 – 1 шт.;

Электрод проволоочный толстый изогнутый, 00500.L6 – 1 шт.;

Электрод-петля каплевидный, 00500.L7 – 1 шт.;

Электрод-петля типа «лассо», 00500.L8 – 1 шт.;


Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, 00500.L9 – 1 шт.;

Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, 00500.L10 – 1 шт.;

23. Набор электродов (10 шт., длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм), 00500.00, в составе:

- Электрод проволоочный тонкий прямой, 00500.L1 – 1 шт.;
- Электрод проволоочный тонкий изогнутый, 00500.L2 – 1 шт.;
- Электрод-петля, диаметр 4мм, 00500.L3 – 1 шт.;
- Электрод -петля, диаметр 8мм, 00500.L4 – 1 шт.;
- Электрод-крючок изогнутый, 00500.L5 – 1 шт.;
- Электрод проволоочный толстый изогнутый, 00500.L6 – 1 шт.;
- Электрод-петля каплевидный, 00500.L7 – 1 шт.;
- Электрод-петля типа «лассо», 00500.L8 – 1 шт.;
- Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, 00500.L9 – 1 шт.;
- Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, 00500.L10 – 1 шт.

Фото изделия и пример маркировки.

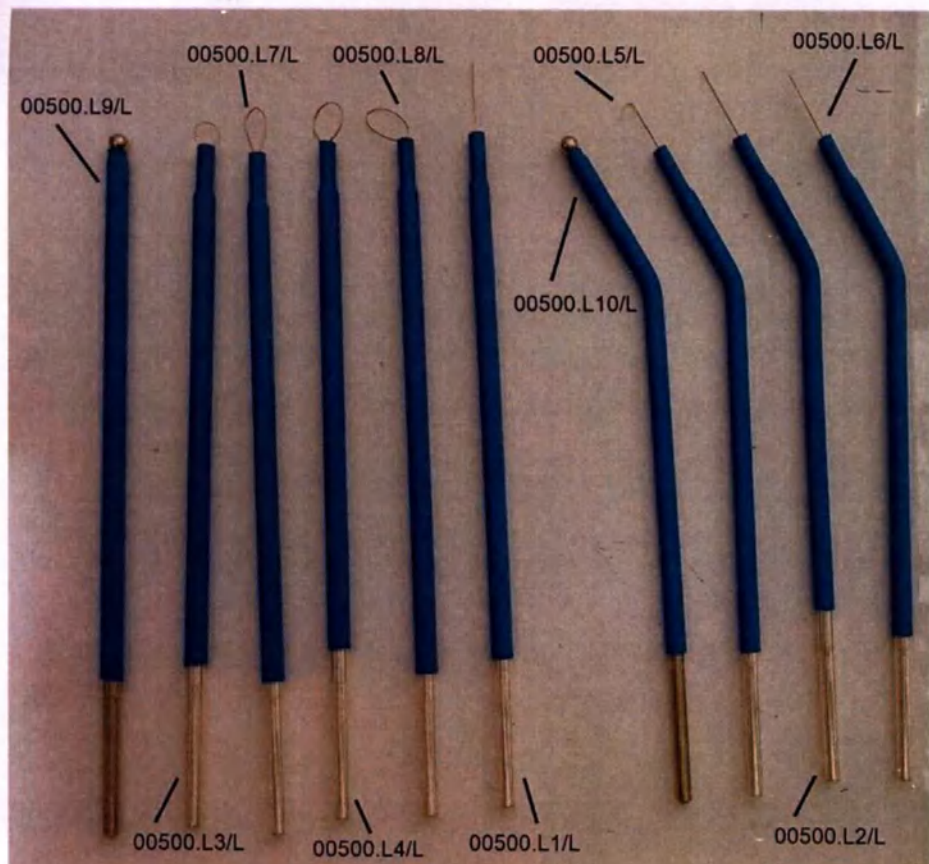

ЭЛЕКТРОД

Набор электродов (10 шт., длина стержня 100мм, посадочный диаметр 2,4мм)

REF 00500.00/L
EAN13 8033638322215

LOT 65063

2019-01 2024-01

NON STERILE

30 CYCLES

121 °C 256 °F AUTOCLAVE 20 min

134 °C 273 °F AUTOCLAVE 10 min

CE 0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

QR code

ЭЛЕКТРОД

Набор электродов (10 шт., длина стержня 100мм, посадочный диаметр 2,4мм) в составе:

Электрод проволоочный тонкий прямой, 00500.L1/L – 1 шт.;
 Электрод проволоочный тонкий изогнутый, 00500.L2/L – 1 шт.;
 Электрод-петля, диаметр 4мм, 00500.L3/L – 1 шт.;
 Электрод-петля, диаметр 8мм, 00500.L4/L – 1 шт.;
 Электрод-крючок изогнутый, 00500.L5/L – 1 шт.;
 Электрод проволоочный толстый изогнутый, 00500.L6/L – 1 шт.;
 Электрод-петля каплевидный, 00500.L7/L – 1 шт.;
 Электрод-петля типа «лассо», 00500.L8/L – 1 шт.;
 Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, 00500.L9/L – 1 шт.;
 Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, 00500.L10/L – 1 шт.

24. Набор электродов (10 шт., длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм), 00500.00/L, в составе:
- Электрод проволоочный тонкий прямой, 00500.L1/L – 1 шт.;
 - Электрод проволоочный тонкий изогнутый, 00500.L2/L – 1 шт.;
 - Электрод-петля, диаметр 4мм, 00500.L3/L – 1 шт.;
 - Электрод-петля, диаметр 8мм, 00500.L4/L – 1 шт.;
 - Электрод-крючок изогнутый, 00500.L5/L – 1 шт.;
 - Электрод проволоочный толстый изогнутый, 00500.L6/L – 1 шт.;
 - Электрод-петля каплевидный, 00500.L7/L – 1 шт.;
 - Электрод-петля типа «лассо», 00500.L8/L – 1 шт.;
 - Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, 00500.L9/L – 1 шт.;
 - Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, 00500.L10/L – 1 шт.

Фото изделия и пример маркировки



25. Электрод проволочный тонкий прямой, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L1;



26. Электрод проволочный тонкий прямой, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L1/L;



27. Электрод проволочный тонкий изогнутый, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L2;



28. Электрод проволочный тонкий изогнутый, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L2/L;



29. Электрод-петля, диаметр 4мм, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L3;



30. Электрод-петля, диаметр 4мм, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L3/L;



31. Электрод-петля, диаметр 8мм, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L4;



32. Электрод-петля, диаметр 8мм, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L4/L;



33. Электрод-крючок изогнутый, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L5;



34. Электрод-крючок изогнутый, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L5/L;



35. Электрод проволоочный толстый изогнутый, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L6;



36. Электрод проволоочный толстый изогнутый, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L6/L;



37. Электрод-петля каплевидный, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L7;



38. Электрод-петля каплевидный, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L7/L;



39. Электрод-петля типа "лассо", длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L8;



40. Электрод-петля типа "лассо", длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L8/L;



41. Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L9;



42. Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L9/L;



43. Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L10;



44. Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L10/L;

БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

Ножницы биполярные изогнутые с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 180мм

REF 410-200-18

LOT 72304

2020-01

2025-01

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprila (LT) - ITALY

CE 0051

NON STERILE

30

181.5

184.5

187.5

190.5

193.5

196.5

199.5

202.5

205.5

208.5

211.5

214.5

217.5

220.5

223.5

226.5

229.5

232.5

235.5

238.5

241.5

244.5

247.5

250.5

253.5

256.5

259.5

262.5

265.5

268.5

271.5

274.5

277.5

280.5

283.5

286.5

289.5

292.5

295.5

298.5

301.5

304.5

307.5

310.5

313.5

316.5

319.5

322.5

325.5

328.5

331.5

334.5

337.5

340.5

343.5

346.5

349.5

352.5

355.5

358.5

361.5

364.5

367.5

370.5

373.5

376.5

379.5

382.5

385.5

388.5

391.5

394.5

397.5

400.5

403.5

406.5

409.5

412.5

415.5

418.5

421.5

424.5

427.5

430.5

433.5

436.5

439.5

442.5

445.5

448.5

451.5

454.5

457.5

460.5

463.5

466.5

469.5

472.5

475.5

478.5

481.5

484.5

487.5

490.5

493.5

496.5

499.5

502.5

505.5

508.5

511.5

514.5

517.5

520.5

523.5

526.5

529.5

532.5

535.5

538.5

541.5

544.5

547.5

550.5

553.5

556.5

559.5

562.5

565.5

568.5

571.5

574.5

577.5

580.5

583.5

586.5

589.5

592.5

595.5

598.5

601.5

604.5

607.5

610.5

613.5

616.5

619.5

622.5

625.5

628.5

631.5

634.5

637.5

640.5

643.5

646.5

649.5

652.5

655.5

658.5

661.5

664.5

667.5

670.5

673.5

676.5

679.5

682.5

685.5

688.5

691.5

694.5

697.5

700.5

703.5

706.5

709.5

712.5

715.5

718.5

721.5

724.5

727.5

730.5

733.5

736.5

739.5

742.5

745.5

748.5

751.5

754.5

757.5

760.5

763.5

766.5

769.5

772.5

775.5

778.5

781.5

784.5

787.5

790.5

793.5

796.5

799.5

802.5

805.5

808.5

811.5

814.5

817.5

820.5

823.5

826.5

829.5

832.5

835.5

838.5

841.5

844.5

847.5

850.5

853.5

856.5

859.5

862.5

865.5

868.5

871.5

874.5

877.5

880.5

883.5

886.5

889.5

892.5

895.5

898.5

901.5

904.5

907.5

910.5

913.5

916.5

919.5

922.5

925.5

928.5

931.5

934.5

937.5

940.5

943.5

946.5

949.5

952.5

955.5

958.5

961.5

964.5

967.5

970.5

973.5

976.5

979.5

982.5

985.5

988.5

991.5

994.5

997.5

1000.5

1003.5

1006.5

1009.5

1012.5

1015.5

1018.5

1021.5

1024.5

1027.5

1030.5

1033.5

1036.5

1039.5

1042.5

1045.5

1048.5

1051.5

1054.5

1057.5

1060.5

1063.5

1066.5

1069.5

1072.5

1075.5

1078.5

1081.5

1084.5

1087.5

1090.5

1093.5

1096.5

1099.5

1102.5

1105.5

1108.5

1111.5

1114.5

1117.5

1120.5

1123.5

1126.5

1129.5

1132.5

1135.5

1138.5

1141.5

1144.5

1147.5

1150.5

1153.5

1156.5

1159.5

1162.5

1165.5

1168.5

1171.5

1174.5

1177.5

1180.5

1183.5

1186.5

1189.5

1192.5

1195.5

1198.5

1201.5

1204.5

1207.5

1210.5

1213.5

1216.5

1219.5

1222.5

1225.5

1228.5

1231.5

1234.5

1237.5

1240.5

1243.5

1246.5

1249.5

1252.5

1255.5

1258.5

1261.5

1264.5

1267.5

1270.5

1273.5

1276.5

1279.5

1282.5

1285.5

1288.5

1291.5

1294.5

1297.5

1300.5

1303.5

1306.5

1309.5

1312.5

1315.5

1318.5

1321.5

1324.5

1327.5

1330.5

1333.5

1336.5

1339.5

1342.5

1345.5

1348.5

1351.5

1354.5

1357.5

1360.5

1363.5

1366.5

1369.5

1372.5

1375.5

1378.5

1381.5

1384.5

1387.5

1390.5

1393.5

1396.5

1399.5

1402.5

1405.5

1408.5

1411.5

1414.5

1417.5

1420.5

1423.5

1426.5

1429.5

1432.5

1435.5

1438.5

1441.5

1444.5

1447.5

1450.5

1453.5

1456.5

1459.5

1462.5

1465.5

1468.5

1471.5

1474.5

1477.5

1480.5

1483.5

1486.5

1489.5

1492.5

1495.5

1498.5

1501.5

1504.5

1507.5

1510.5

1513.5

1516.5

1519.5

1522.5

1525.5

1528.5

1531.5

1534.5

1537.5

1540.5

1543.5

1546.5

1549.5

1552.5

1555.5

1558.5

1561.5

1564.5

1567.5

1570.5

1573.5

1576.5

1579.5

1582.5

1585.5

1588.5

1591.5

1594.5

1597.5

1600.5

1603.5

1606.5

1609.5

1612.5

1615.5

1618.5

1621.5

1624.5

1627.5

1630.5

1633.5

1636.5

1639.5

1642.5

1645.5

1648.5

1651.5

1654.5

1657.5

1660.5

1663.5

1666.5

1669.5

1672.5

1675.5

1678.5

1681.5

1684.5

1687.5

1690.5

1693.5

1696.5

1699.5

1702.5

1705.5

1708.5

1711.5

1714.5

1717.5

1720.5

1723.5

1726.5

1729.5

1732.5

1735.5

1738.5

1741.5

1744.5

1747.5

1750.5

1753.5

1756.5

1759.5

1762.5

1765.5

1768.5

1771.5

1774.5

1777.5

1780.5

1783.5

1786.5

1789.5

1792.5

1795.5

1798.5

1801.5

1804.5

1807.5

1810.5

1813.5

1816.5

1819.5

1822.5

1825.5

1828.5

1831.5

1834.5

1837.5

1840.5

1843.5

1846.5

1849.5

1852.5

1855.5

1858.5

1861.5

1864.5

1867.5

1870.5

1873.5

1876.5

1879.5

1882.5

1885.5

1888.5

1891.5

1894.5

1897.5

1900.5

1903.5

1906.5

1909.5

1912.5

1915.5

1918.5

1921.5

1924.5

1927.5

1930.5

1933.5

1936.5

1939.5

1942.5

1945.5

1948.5

1951.5

1954.5

1957.5

1960.5

1963.5

1966.5

1969.5

1972.5

1975.5

1978.5

1981.5

1984.5

1987.5

1990.5

1993.5

1996.5

1999.5

2002.5

2005.5

2008.5

2011.5

2014.5

2017.5

2020.5

2023.5

2026.5

2029.5

2032.5

2035.5

2038.5

2041.5

2044.5

2047.5

2050.5

2053.5

2056.5

2059.5

2062.5

2065.5

2068.5

2071.5

2074.5

2077.5

2080.5

2083.5

2086.5

2089.5

2092.5

2095.5

2098.5

2101.5

2104.5

2107.5

2110.5

2113.5

2116.5

2119.5

2122.5

2125.5

2128.5

2131.5

2134.5

2137.5

2140.5

2143.5

2146.5

2149.5

2152.5

2155.5

2158.5

2161.5

2164.5

2167.5

2170.5

2173.5

2176.5

2179.5

2182.5

2185.5

2188.5

2191.5

2194.5

2197.5

2200.5

2203.5

2206.5

2209.5

2212.5

2215.5

2218.5

2221.5

2224.5

2227.5

2230.5

2233.5

2236.5

2239.5

2242.5

2245.5

2248.5

2251.5

2254.5

2257.5

2260.5

2263.5

2266.5

2269.5

2272.5

2275.5

2278.5

2281.5

2284.5

2287.5

2290.5

2293.5

2296.5

2299.5

2302.5

2305.5

2308.5

2311.5

2314.5

2317.5

2320.5

2323.5

2326.5

2329.5

2332.5

2335.5

2338.5

2341.5

2344.5

2347.5

2350.5

2353.5

2356.5

2359.5

2362.5

2365.5

2368.5

2371.5

2374.5

2377.5

2380.5

2383.5

2386.5

2389.5

2392.5

2395.5

2398.5

2401.5

2404.5

2407.5

2410.5

2413.5

2416.5

2419.5

2422.5

2425.5

2428.5

2431.5

2434.5

2437.5

2440.5

2443.5

2446.5

2449.5

2452.5

2455.5

2458.5

2461.5

2464.5

2467.5

2470.5

2473.5

2476.5

2479.5

2482.5

2485.5

2488.5

2491.5

2494.5

2497.5

2500.5

2503.5

2506.5</

БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
Ножницы биполярные изогнутые с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 210мм

REF 410-200-21

LOT 72305


2020-01 2025-01


LED SpA Via Salsatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

8 0 3 3 6 3 8 3 2 3 7 1 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторы с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртодержающим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окислении контактов и кристаллизации в зазорах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

46. Ножницы биполярные изогнутые с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 210мм, 410-200-21.
Фото изделия и пример маркировки

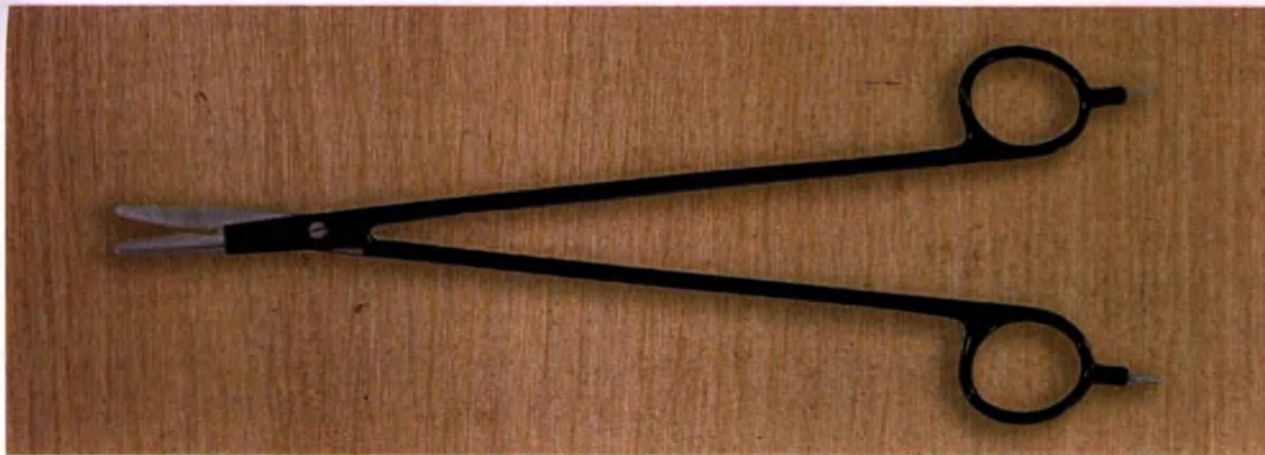

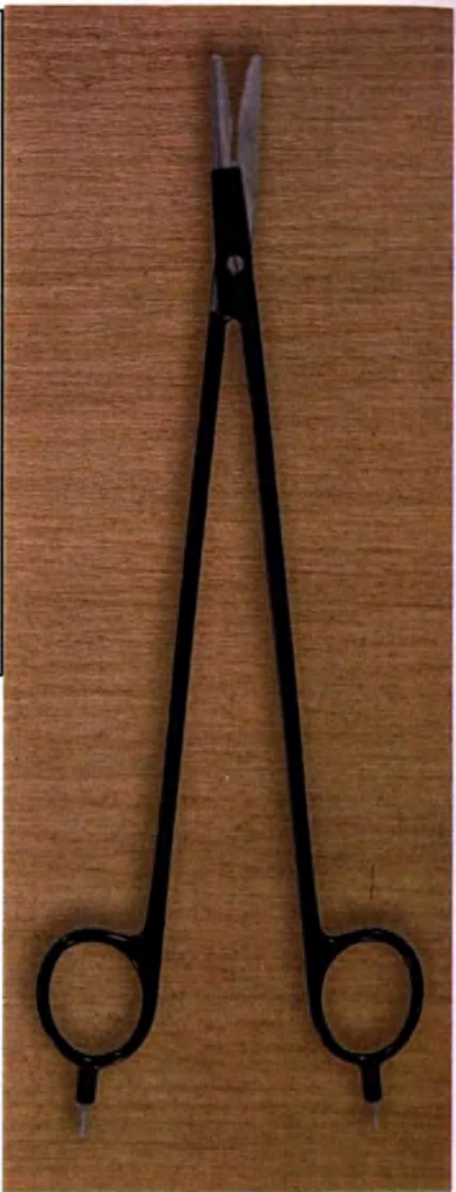

**БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**

Ножницы биполярные изолирующие с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 230мм

REF 410-200-23

LOT 72306

2020-01

2025-01

NON
STERILE

30
CYCLES

131 °C
20 min

134 °C
10 min


CE 0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprila (LT) - ITALY

8 033638 323117

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окислении контактов и кристаллизации в заглушках срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.


47. Ножницы биполярные изготовленные с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 230мм, 410-200-23. Фото изделия и пример маркировки

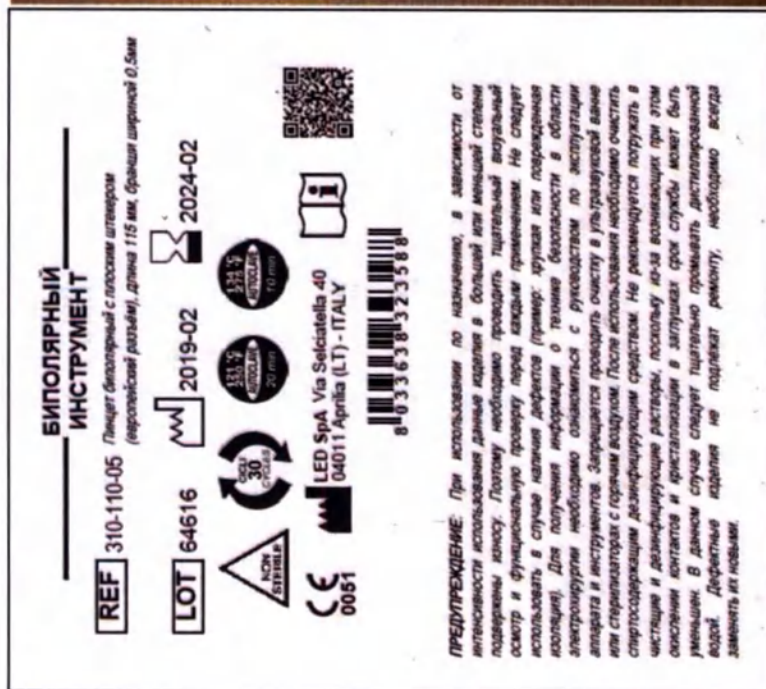

48. Пинцет биполярный с плоским штекером (европейский разъем), длина 115 мм, бранши шириной 0,5мм, 310-110-05. Фото изделия и пример маркировки



49. Пинцет биполярный изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 115 мм, бранши шириной 0,5мм, 310-112-05. Фото изделия и пример маркировки

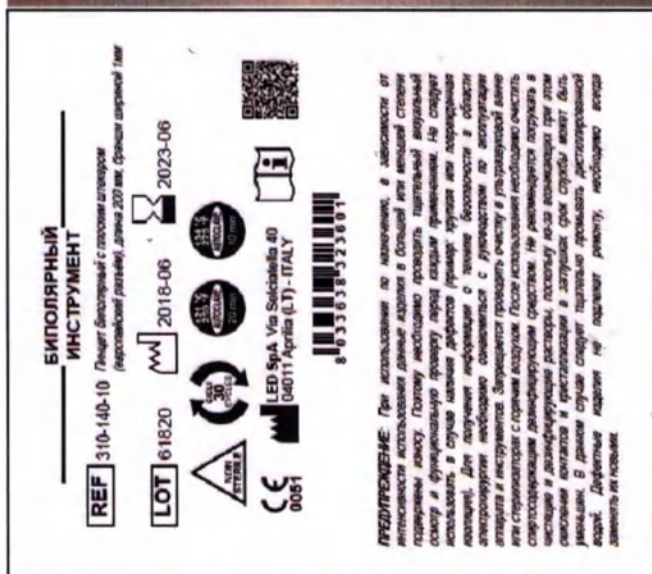

50. Пинцет биполярный с плоским штекером (европейский разъём), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-140-10. Фото изделия и пример маркировки



51. Пинцет биполярный с плоским штекером (европейский разъём), длина 200 мм, бранши шириной 2мм, 310-140-20. Фото изделия и пример маркировки



53. Пинцет биполярный изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 2мм, 310-142-20. Фото изделия и пример маркировки



54. Пинцет биполярный байонетные с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-180-10. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REF 310-180-20 Пинцет биполярный байонетные с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 2мм

LOT 64295

2019-02 2024-02

LED SPA Via Salsomaggi 40 04011 Agrate (LT) - ITALY

8 433 638 323 650

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещин, изгибов или повреждений изоляции). Для получения информации о технике безопасности в области электротехники необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить стерилизаторах дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку это вызывает коррозию при этом окислении контактов и кристаллизации в загибках среза ступицы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дезинфицирующей водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

55. Пинцет биполярный байонетные с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 2мм, 310-180-20. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REF 310-182-10 Пинцет биполярный байонетный изогнутый наружу с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм

LOT 60934

2018-03 2023-03

LED SPA Via Salsomaggi 40 04011 Agrate (LT) - ITALY

8 433 638 323 650

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещин, изгибов или повреждений изоляции). Для получения информации о технике безопасности в области электротехники необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить стерилизаторах дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку это вызывает коррозию при этом окислении контактов и кристаллизации в загибках среза ступицы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дезинфицирующей водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

56. Пинцет биполярный байонетные изогнутые наружу с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-182-10. Фото изделия и пример маркировки



57. Пинцет биполярный байонетные изогнутые внутрь с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-185-10. Фото изделия и пример маркировки



58. Электрод биполярный для коагуляции швов прямой с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм, 310-510. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ

ИНСТРУМЕНТ

REF 310-550

Электрод биполярный для коагуляции швов изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм

LOT 76538

2021-04

2026-04

LED SpA Via Selciatella 40

04011 Aprilia (LT) - ITALY

EAN13 8033638322694

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большой или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещины, изгибы или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электротехники необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторы с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спайтосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окисления контактов и кристаллизации в зажимах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

59. Электрод биполярный для коагуляции швов изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм, 310-550. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ

ИНСТРУМЕНТ

REF 310-590

Электрод биполярный для коагуляции швов изогнутый на 45° с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм

LOT 75102

2021-03

2026-03

LED SpA Via Selciatella 40

04011 Aprilia (LT) - ITALY

EAN13 8033638323700

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большой или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещины, изгибы или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электротехники необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторы с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спайтосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окисления контактов и кристаллизации в зажимах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

60. Электрод биполярный для коагуляции швов изогнутый на 45°С с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм, 310-590. Фото изделия и пример маркировки



Ручка

REF 00205.00 LOT 76955 2021-06 2026-06 0051 NON STERILE 100 CYCLES 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min 	Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug) LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY
--	---

0 °C +50 °C 20% 80%

8 033638 321225

61. Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug), 00205.00. Фото изделия и пример маркировки



Ручка					
REF 00205.40	Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем для электрода с посадочным диаметром 4мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug)				
LOT 67890					
2019-07					
2024-07					
0051	NON STERILE	CYCLES 100	121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min	134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min	
LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY					

62. Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug), 00205.40. Фото изделия и пример маркировки



Ручка

REF 00206.00

LOT 64900

2019-01

2024-01

CE 0051

NON STERILE

100 CYCLES

121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min

134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

MADE IN ITALY

0 °C +50 °C 20% 80%

8 0 3 3 6 3 8 3 2 1 2 3 2

Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug)

63. Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug), 00206.00. Фото изделия и пример маркировки



Ручка					
REF 00206.40	Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением для электрода с посадочным диаметром 4мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug)				
LOT 67891					
2019-07					
2024-07					
0051	NON STERILE	100 CYCLES	121 °C 250 °F 20 min AUTOCLAVE	134 °C 275 °F 10 min AUTOCLAVE	
LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY					
0 °C +50 °C 20% 80%		8 0 3 3 6 3 8 3 2 4 5 5 4			

64. Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug), 00206.40. Фото изделия и пример маркировки



Кабель					
REF 00402.04	Кабель автоклавируемый для подключения монополярных инструментов M4-F2.M, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Ø4 мм, со стороны инструмента - гнездовой разъем 2-2,8 мм				
LOT 72504					
2020-01					
2025-01					
0051	NON STERILE	100 CYCLES	121 °C 250 °F 20 min	134 °C 275 °F 10 min	
LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY					

65. Кабель автоклавируемый для подключения монополярных инструментов M4-F2.M, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Ø4 мм, со стороны инструмента - гнездовой разъем 2-2,8 мм, 00402.04. Фото изделия и пример маркировки



Кабель

REF 00404.08

LOT 71642

2020-04

Совместим с аппаратами 5365A / 6429A, 00401.10/00401.20

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайного ожога:

- Кабель должен использоваться с электрофизиологическим аппаратом и/или принадлежностями в соответствии с действующими нормами.
- Для получения информации об использовании аппарата электрофизиологического и других необходимых принадлежностей следует обратиться к инструкциям.
- Не следует допускать прямого контакта кабелей с кожей пациента, естественный эффект может вызвать ожог.
- При соединении кабеля от аппарата электрофизиологического не следует тянуть за провод, необходимо брать его непосредственно за предназначенный для подключения разъем.

ОЧИСТКА

Сразу после использования необходимо протирать проточной водой, затем погружать на 45 минут в 2-процентный раствор обычного дезинфицирующего средства

CE 0051

LED SpA Via Svizzera 49
04011 Agnè (LT) - ITALY

00404.08_08_10 ed. 03-2019

66. Кабель для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стального/стального с TPE покрытием, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Jack Ø6,3мм, со стороны инструмента - разъем для подключения язычкового соединения, 00404.08. Фото изделия и пример маркировки



Кабель

[REF] 00404 09 *Кабель, автоклавируемый для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стального/стального с TFC покрытием с язычковым соединением, длиной 3м со стороны аппарата - штекер Jack Ø6,3мм*

[LOT] 71011

[W] 2020-02

Совместим с аппаратами S365A / 4429A, 00404, 10000401, 20

00404-09-10 №1 03-2019

LED SpA Via Salsomaggi 40
04011 Argenta (LT) - ITALY

317°F
20 min

374°F
10 min

100°C
10 min

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Вставить кабель в разъем аппарата.

2. Проверить надежность соединения.

Глубокая маркировка предотвращает повреждение кабеля при изгибе.

- Кабель должен использоваться с электродами аппаратами и штепселями, соответствующими с действительными нормами.
- Для получения информации об использовании аппарата электрофизиологической функции необходимо приложить усилия к обеспечению безопасности и целостности.
- Не следует допускать прямого контакта кабелей с кожей пациента, поскольку это может вызвать ожоги.
- При использовании кабеля от аппарата электрофизиологического не следует использовать лишний кабель, поскольку это может привести к повреждению кабеля.

67. Кабель автоклавируемый для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стального/стального с TFC покрытием, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Jack Ø6,3мм, со стороны инструмента - разъем для подключения язычкового соединения, 00404.09. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00411.00

LOT 66009




2019-03



2024-03



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

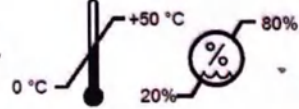

68. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3 м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента – плоский разъем (European Flat plug), 00411.00. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00412.00

LOT 63478



2018-09




2023-09



0051



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

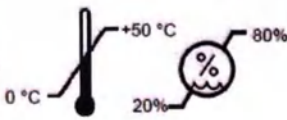

69. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа «банан» 4 мм (4mm 2-Banana plug), со стороны инструмента - плоский разъем (European Flat plug), 00412.00. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00414.00

LOT 72505



2020-01



2025-01

Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - 2х штырьковый разъем (USA 2-Pin plug)



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



0 °C +50 °C 20% 80%



70. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - 2х штырьковый разъем (USA 2-Pin plug), 00414.00. Фото изделия и пример маркировки




КАБЕЛЬ

REF	00415.00	Кабель автоклавируемый для
LOT	72508	подключения биполярных инструментов
	2020-01	END01 (F4-F2.M), длиной 3м: со
	2025-01	стороны аппарата - 2х контактный
		штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4mm
		на расстоянии 29 мм), со стороны
		инструмента - гнездовые разъемы 4 мм
		и 2-2,8 мм

CE
0051



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

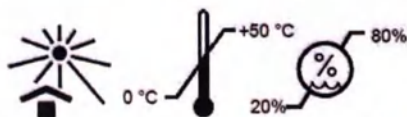

71. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов END01 (F4-F2.M), длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4mm на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - гнездовые разъемы 4 мм и 2-2,8 мм, 00415.00. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00418.00

LOT 72514

2020-01

2025-01

Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов SCISS (F2.M-F2.M), длиной 3м: со стороны аппарата - штекер 2-х штырьковый 4 мм (на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - два гнездовых разъема 2-2,8 мм

0051

NON STERILE

100 CYCLES

121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min

134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



0 °C +50 °C 20% 80%



72. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов SCISS (F2.M-F2.M), длиной 3м: со стороны аппарата - штекер 2-х штырьковый 4 мм (на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - два гнездовых разъема 2-2,8 мм, 00418.00. Фото изделия и пример маркировки

Генеральный директор

ООО «МегаМед Корпорэйшн»

П. В. Гижинский

Прошито и пронумеровано

44 / сорок четыре

листа (ов).

