

ООО «МегаМед Корпорэйшн»

Аппарат электрохирургический высокочастотный Surtron 200

Приложение 1

Фотографические изображения

(инструменты электрохирургические, входящие в стандартную комплектацию и в состав медицинского изделия опционально (с пометкой «при необходимости»))

Производства LED S.p.A., Италия

2024 г.

**Электрод
нейтральный**

REF 00401.02

LOT 65832

2019-05

Электрод пациента возвратный нейтральный
стальной 160x120мм, с кабелем длиной 3м,
разъем со стороны генератора - типа Jack
Ø6,3мм, автоклавируемый

134 °C
275 °C
100 CYCLES

134 °C
275 °C
100 CYCLES

121 °C
250 °C
20 min

134 °C
275 °C
10 min

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

• Все подкладки электрода пациента возвратного нейтрального должны быть размещены на хорошо вазелинизированной поверхности, как можно ближе к оперируемому участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, протоками, рубцами и частями тела, которые подверглись воздействию жидкости или имеют подкожную жировую ткань. Части тела должны быть без волос, сухой и чистой. Не используйте спирт для очистки кожи. Не рекомендуется использовать жеплатиновые вещества для электродов.



8 103363 152143 6




(1) - зона терапии

• Если аппарат электрофизиологический не производит желаемый эффект, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы аппарата электрофизиологического при настройке на нормальное значение выходной мощности, может быть опускание контакта электрода пациента возвратного нейтрального или его неправильное расположение.

CE 0051

LED SpA Via Salsizella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



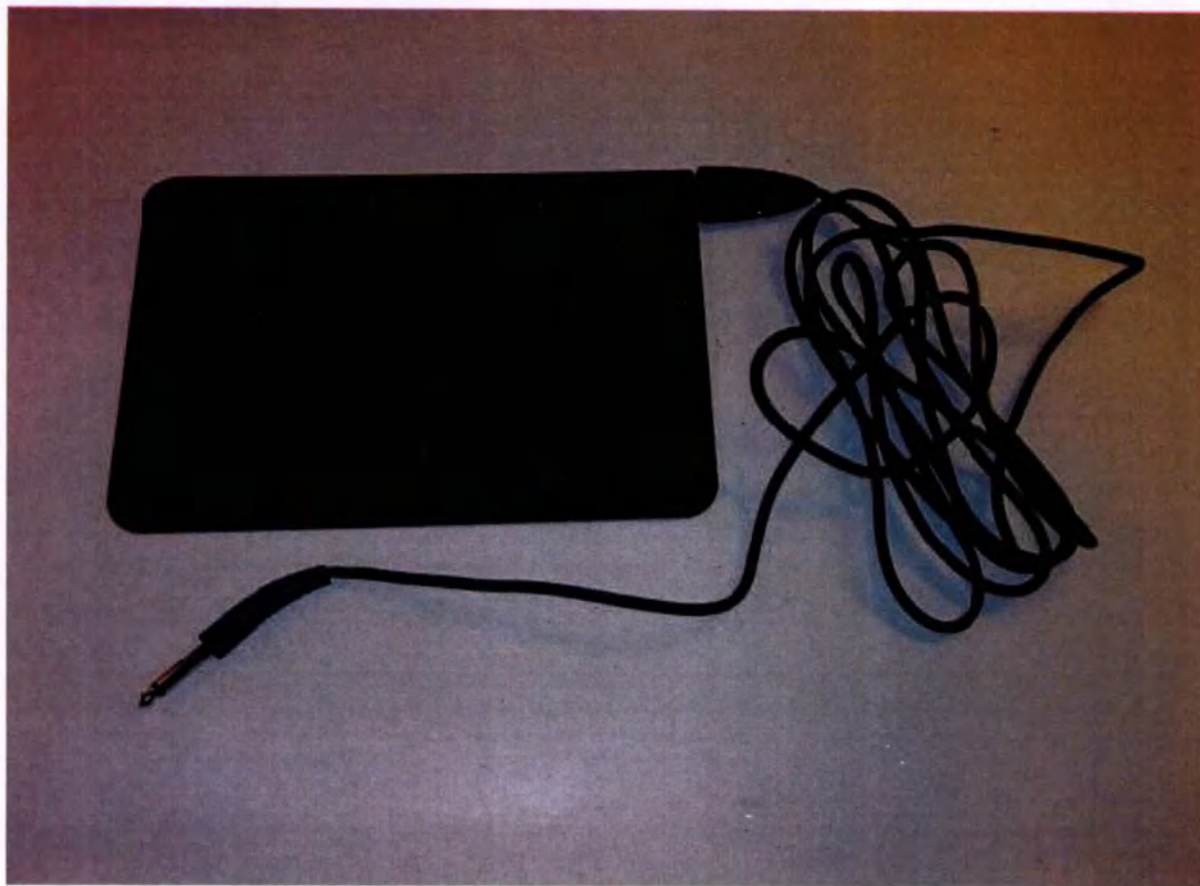

1. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 160x120мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора - типа Jack Ø6,3мм, автоклавируемый, 00401.02. Фото изделия и пример маркировки.

**Электрод
нейтральный**

Электрод пациента возвратный нейтральный
стальной 240x160мм, с кабелем длиной 3м,
разъем со стороны генератора - типа Jack
Ø6,3мм, автоклавируемый

REF 00401.03
LOT 68787
2019-09

121 °C
250 °F
АУТОКЛАВ
20 min

134 °C
275 °F
АУТОКЛАВ
10 min


100
CYCLES

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

- Вся поверхность электрода пациента возвратного нейтрального должна быть размещена на хорошо васкуляризованной мышце, как можно ближе к оперируемому участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, протезами, рубцами и частями тела, которые подвергнуты накоплению жидкости или имеют подкожную жировую ткань. Часть тела должна быть без волос, сухой и чистой. Не используйте спирт для очистки кожи. Не рекомендуется использовать желатиновые вещества для электродов.

MA00401-03_12 ed. 10-2017

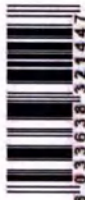

8 18 33638 321447



(1) - зона тералии

CE 0051

LED SpA Via Sciacatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY




** Если аппарат электрофизиологический не производит жаровый эффект, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы аппарата электрофизиологического, при настройке на нормальное значение выходной мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального или его неправильное расположение.*

2. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 240x160мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора - типа Jack Ø6,3мм, автоклавируемый, 00401.03. Фото изделия и пример маркировки.

Электрод
нейтральный

REF 5365A
LOT C4015/18
2018-09
Совместим с 00404.08

Электрод пациента возвратный нейтральный 160x120мм с язычковым соединением

351 °C
353 °C
272 °C
274 °C
20 мин.
12 мин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед первым использованием снимите защитные пленки

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

- Вся поверхность электрода пациента возвратного нейтрального должна быть размещена на хорошо васкуляризованной мышце, как можно ближе к операционному участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, артериями, рубцами и чистыми телами, которые подвержены накоплению жидкости или имеют подложную жировую ткань. Часть тела должна быть без волос, сухой и чистой. Не используйте спирт для очистки кожи. Не рекомендуется использовать жепатинные вещества для электродов.

LM5365_L2 v0.10-2017

(1) зона термализации

8 1033638 322263

Если интратект электротриггерический не вызывает желаемый эффект, следует проверить электрод пациента возвратного нейтрального. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы электротриггерического аппарата, при установке на нормальное значение выходной мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального или его неправильное размещение.

CE 0051

LED SpA Via Solciatelli 40
04011 Aprila (LT) - ITALY

MADE IN ITALY



3. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 160x120мм с язычковым соединением, 5365A. Фото изделия и пример маркировки.

Электрод
нейтральный

REF 6420A
Электрод пациента возвратный нейтральный
нейтральный стальной 240x160мм
с язычковым соединением

LOT C2417

2017-04

Соединения с 0000408

121 °C
250 °C
275 °C
10 min

134 °C
275 °C
10 min

10 min

10 min

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск лучевой ожогов

- Вся поверхность электрода пациента возвратного нейтрального должна быть размещена на хорошо вентилируемой поверхности, как можно ближе к операционному участку и постоянно проветривать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с кистями, локтями, плечами, руками, руками и частями тела, которые подвержены воздействию жидкостей или имеют подкожную жировую ткань. Чистая ткань должна быть без волос, грязи и чистоты. Не используйте электрод для очистки кожи. Не рекомендуется использовать желатиновые вещества для электрода.

MA3365_12 ed. 10-2017

(1) - зона терапии

8 0 3 3 6 3 0 3 2 2 2 3 3

LED SpA Via Seicitalia 48
04011 Aprica (LT) - ITALY

CE 0051

QR CODE

4. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 240x160мм с язычковым соединением, 6429A. Фото изделия и пример маркировки.

Электрод нейтральный

REF 00401.10

LOT 68417

2019-10

2024-10

Электрод пациента возвратный
нейтральный стальной с TPE покрытием
210x120мм с язычковым соединением



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

• Вся поверхность электрода пациента возвратного нейтрального должна быть размещена на хорошо васкуляризованной мышце, как можно ближе к оперируемому участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, пролезнами, рубцами и частями тела, которые подвержены накоплению жидкости или имеют подкожную жировую ткань. Часть тела должна быть без волос, сухой и чистой. Не используйте спирт для очистки кожи. Не рекомендуется использовать желатиновые вещества для электрода.



M00401-10-10 ed. 03-2019

• Если аппарат электрофизиологический не производит желаемый эффект, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы электрофизиологического аппарата, при настройке на нормальное значение выходной мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального или его неправильное расположение.

CE 0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



5. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной с TPE покрытием 210x120мм с язычковым соединением, 00401.10. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-110 *Электрод-лезвие, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм*
EAN13 8033638323373

LOT 68346 2019-09 2024-09

NON STERILE CICLI 30 CYCLES 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

0051 LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

7. Электрод-лезвие, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-110. Фото изделия и пример маркировки.



Электрод

REF 152-112 *Электрод-лезвие изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм*
EAN13 8033638323380

LOT 61825 2018-08 2023-08

NON STERILE CICLI 30 CYCLES 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

0051 LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

8. Электрод-лезвие изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-112. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-115
EAN13 8033638323403

LOT 65348

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

Электрод-лезвие, длина стержня 160мм,
посадочный диаметр 2,4 мм

2019-03 2024-03

9. Электрод-лезвие, длина стержня 160мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-115. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-120
EAN13 8033638323410

LOT 68930

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

Электрод-игла, длина стержня 70мм,
посадочный диаметр 2,4 мм

2019-10 2024-10

10. Электрод-игла, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-120. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД	
REF 152-122	Электрод-игла изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм
EAN13 8033638323427	
LOT 60945	2018-03 2023-03
NON STERILE	
CE 0051	LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

11. Электрод-игла изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-122. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД	
REF 152-125	Электрод-игла, длина стержня 130мм, посадочный диаметр 2,4 мм
EAN13 8033638323434	
LOT 60946	2018-03 2023-03
NON STERILE	
CE 0051	LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

12. Электрод-игла, длина стержня 130мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-125. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-130 *Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323441

LOT 61022 2018-08 2023-08

LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

13. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-130. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-132 *Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323458

LOT 65402 2019-03 2024-03

LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

14. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-132. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-140

EAN13 8033638323465

LOT 60949

CE 0051

Электрод-шар, длина стержня 60мм,
диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм

2018-03 2023-03

NON
STERILE

CICLI
30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

15. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-140. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-142

EAN13 8033638323472

LOT 60950

CE 0051

Электрод-шар изогнутый, длина стержня 50мм,
диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм

2018-03 2023-03

NON
STERILE

CICLI
30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

16. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 50мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-142. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-145

EAN13 8033638323489

LOT 60951

Электрод-шар, длина стержня 140мм,
диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм

2018-03

2023-03

NON
STERILE

CICLI
30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

CE
0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

17. Электрод-шар, длина стержня 140мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-145. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-150

EAN13 8033638323496

LOT 68516

Электрод-шар, длина стержня 60мм,
диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм

2019-10

2024-10

NON
STERILE

CICLI
30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

CE
0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

18. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-150. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-152 *Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323502

LOT 60953 2018-03 2023-03

LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

19. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-152. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-160 *Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323519

LOT 60954 2018-03 2023-03

LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

20. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-160. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-162 *Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323528

LOT 60955 2018-03 2023-03

CE 0051 **LED SpA** Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

21. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-162. Фото изделия и пример маркировки




ЭЛЕКТРОД

REF 152-165 *Электрод-шар, длина стержня 140мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323533

LOT 60956 2018-03 2023-03

CE 0051 **LED SpA** Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

22. Электрод-шар, длина стержня 140мм, диаметр 5мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-165. Фото изделия и пример маркировки

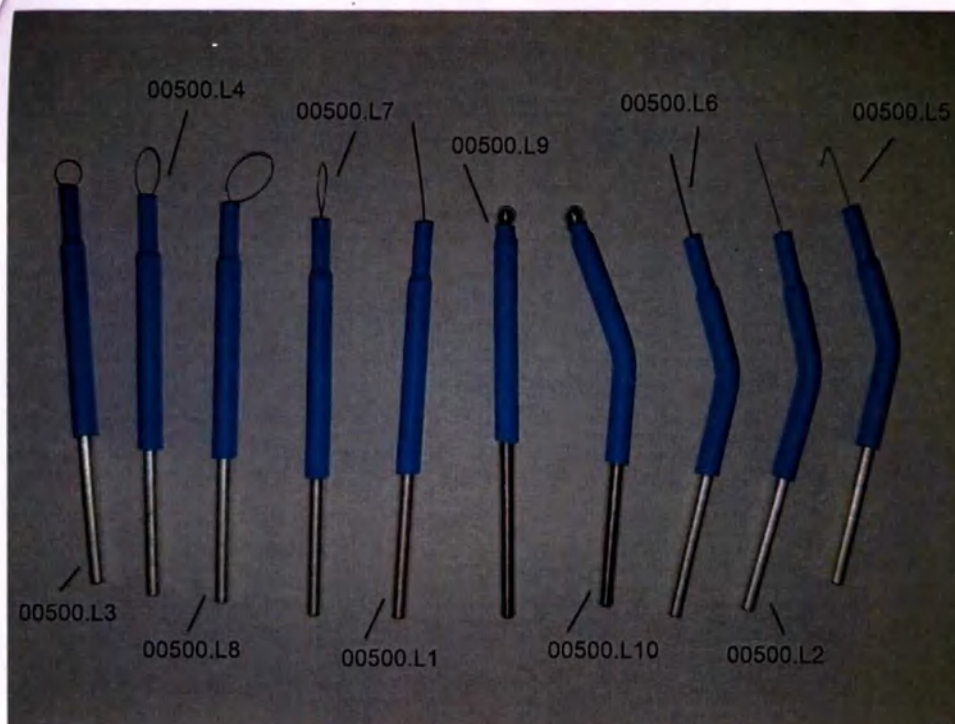

ЭЛЕКТРОД

RFF 00500.00 Набор электродов (10 шт., длина стержня 50мм, посадочный диаметр 2,4мм)

EAN13 8033638322277

LOT 65411 2019-03 2024-03

NON STERILE

30 CYCLES

121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min

134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

CE 0051

LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

ЭЛЕКТРОД

Набор электродов (10 шт., длина стержня 50мм, посадочный диаметр 2,4мм) в составе:

Электрод проволоочный тонкий прямой, 00500.L1 – 1 шт.;

Электрод проволоочный тонкий изогнутый, 00500.L2 – 1 шт.;

Электрод-петля, диаметр 4мм, 00500.L3 – 1 шт.;

Электрод -петля, диаметр 8мм, 00500.L4 – 1 шт.;

Электрод-крючок изогнутый, 00500.L5 – 1 шт.;

Электрод проволоочный толстый изогнутый, 00500.L6 – 1 шт.;

Электрод-петля каплевидный, 00500.L7 – 1 шт.;

Электрод-петля типа «лассо», 00500.L8 – 1 шт.;


Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, 00500.L9 – 1 шт.;

Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, 00500.L10 – 1 шт.;

23. Набор электродов (10 шт., длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм), 00500.00, в составе:

- Электрод проволоочный тонкий прямой, 00500.L1 – 1 шт.;
- Электрод проволоочный тонкий изогнутый, 00500.L2 – 1 шт.;
- Электрод-петля, диаметр 4мм, 00500.L3 – 1 шт.;
- Электрод -петля, диаметр 8мм, 00500.L4 – 1 шт.;
- Электрод-крючок изогнутый, 00500.L5 – 1 шт.;
- Электрод проволоочный толстый изогнутый, 00500.L6 – 1 шт.;
- Электрод-петля каплевидный, 00500.L7 – 1 шт.;
- Электрод-петля типа «лассо», 00500.L8 – 1 шт.;
- Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, 00500.L9 – 1 шт.;
- Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, 00500.L10 – 1 шт.

Фото изделия и пример маркировки.

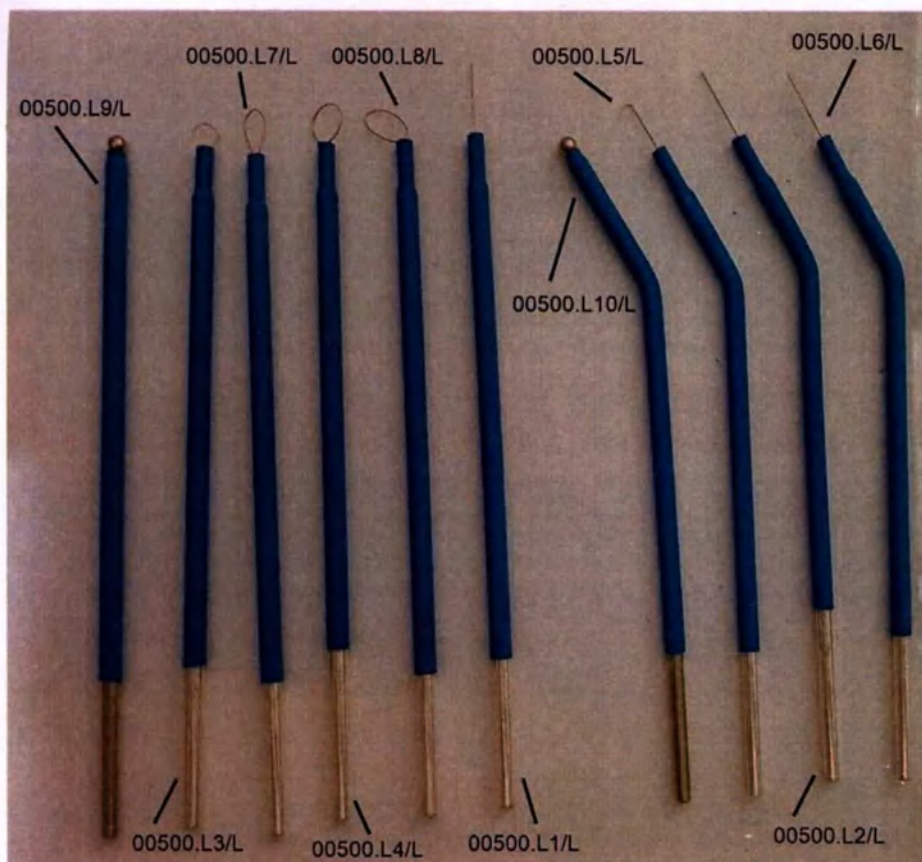

ЭЛЕКТРОД

REF 00500.00/L Набор электродов (10 шт., длина стержня 100мм, посадочный диаметр 2,4мм)

EAN13 8033638322215

LOT 65063

2019-01

2024-01

NON STERILE

30 CYCLES

121 °F AUTOCLAVE 20 min

134 °F AUTOCLAVE 10 min

CE 0051

LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

ЭЛЕКТРОД

Набор электродов (10 шт., длина стержня 100мм, посадочный диаметр 2,4мм) в составе:

Электрод проволоочный тонкий прямой, 00500.L1/L – 1 шт.;

Электрод проволоочный тонкий изогнутый, 00500.L2/L – 1 шт.;

Электрод-петля, диаметр 4мм, 00500.L3/L – 1 шт.;

Электрод-петля, диаметр 8мм, 00500.L4/L – 1 шт.;

Электрод-крючок изогнутый, 00500.L5/L – 1 шт.;

Электрод проволоочный толстый изогнутый, 00500.L6/L – 1 шт.;

Электрод-петля каплевидный, 00500.L7/L – 1 шт.;

Электрод-петля типа «лассо», 00500.L8/L – 1 шт.;

Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, 00500.L9/L – 1 шт.;

Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, 00500.L10/L – 1 шт.

24. Набор электродов (10 шт., длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм), 00500.00/L, в составе:
- Электрод проволоочный тонкий прямой, 00500.L1/L – 1 шт.;
 - Электрод проволоочный тонкий изогнутый, 00500.L2/L – 1 шт.;
 - Электрод-петля, диаметр 4мм, 00500.L3/L – 1 шт.;
 - Электрод-петля, диаметр 8мм, 00500.L4/L – 1 шт.;
 - Электрод-крючок изогнутый, 00500.L5/L – 1 шт.;
 - Электрод проволоочный толстый изогнутый, 00500.L6/L – 1 шт.;
 - Электрод-петля каплевидный, 00500.L7/L – 1 шт.;
 - Электрод-петля типа «лассо», 00500.L8/L – 1 шт.;
 - Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, 00500.L9/L – 1 шт.;
 - Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, 00500.L10/L – 1 шт.

Фото изделия и пример маркировки



25. Электрод проволочный тонкий прямой, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L1;



26. Электрод проволочный тонкий прямой, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L1/L;



27. Электрод проволочный тонкий изогнутый, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L2;



28. Электрод проволочный тонкий изогнутый, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L2/L;



29. Электрод-петля, диаметр 4мм, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L3;



30. Электрод-петля, диаметр 4мм, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L3/L;



31. Электрод-петля, диаметр 8мм, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L4;



32. Электрод-петля, диаметр 8мм, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L4/L;



33. Электрод-крючок изогнутый, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L5;



34. Электрод-крючок изогнутый, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L5/L;



35. Электрод проволоочный толстый изогнутый, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L6;



36. Электрод проволоочный толстый изогнутый, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L6/L;



37. Электрод-петля каплевидный, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L7;



38. Электрод-петля каплевидный, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L7/L;



39. Электрод-петля типа "лассо", длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L8;



40. Электрод-петля типа "лассо", длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L8/L;



41. Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L9;



42. Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L9/L;



43. Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L10;



44. Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L10/L;

БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
Ножницы-зажимы биполярные с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длиной 190мм

REF 410-100-19

LOT 72302

2020-01

2025-01

CE 0051

LED SpA Via Seiciatella 40
04011 Aprila (LT) - ITALY

NON STERILE

30 days

181 °C


134 °C


10 min

8 46 3 6 3 8 3 2 3 1 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электробезопасности необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртодержателем дезинфицирующим раствором. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окисления контактов и кристаллизации в зазорах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

46. Ножницы-зажимы биполярные с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длиной 190мм, 410-100-19.
Фото изделия и пример маркировки

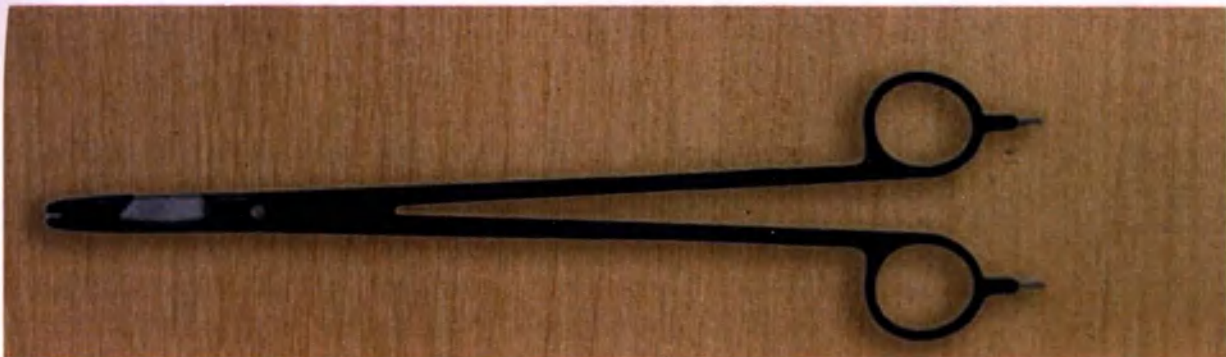

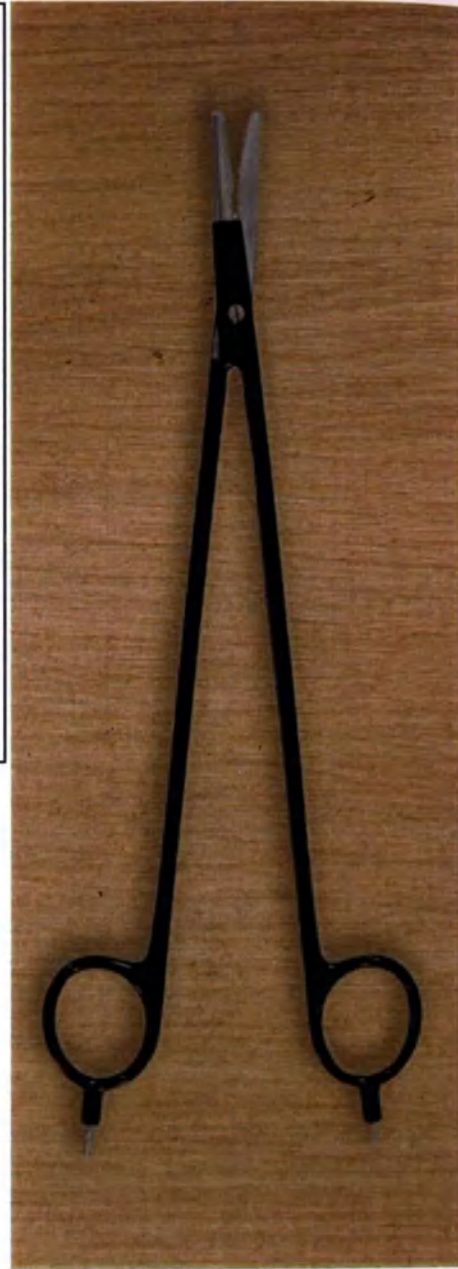

**БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**

Ножицы биполярные изогнутые с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 210мм

REF 410-200-21

LOT 72305

2020-01

2025-01

NON STERILE

30 CYCLES

20 min

10 min


CE 0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

8 633638 323711

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окислении контактов и кристаллизации в заглушках срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

48. Ножницы биполярные изогнутые с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 210мм, 410-200-21.
Фото изделия и пример маркировки

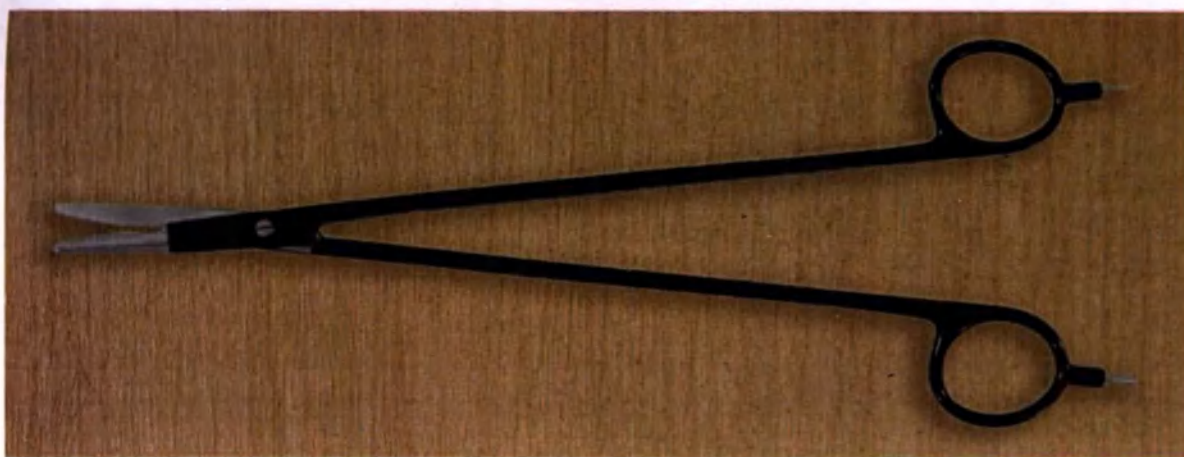

БИПОЛЯРНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

REF 410-200-23 Ножницы биполярные изогнутые с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 230мм

LOT 72306

2020-01

2025-01

LED SpA Via Salsavilla 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

CE 0061

8 603 638 323 11

PRELIMINARE При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электротехники необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртовыми растворами дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, порошок, не-закаливающие при этом окисления контактов и кристаллизации в загибах стержня могут быть уменьшены. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

49. Ножницы биполярные изогнутые с штекерами для гнездового разъема 2,0-2,8, длина 230мм, 410-200-23. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Пинцет биполярный с плоским штекером (европейский разъем), длина 115 мм, бранши шириной 0,5мм

REF 310-110-05

LOT 64616

2019-02 2024-02

LED SpA Via Salsatella 40
04011 Aprila (LT) - ITALY

8 40 3 3 6 3 8 3 2 3 5 8

CE 0061

NON STERILE

115 mm 30 mm 115 mm 30 mm

QR code

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещин, изгибов или повреждение изоляции). Для получения информации о технике безопасности в области электробезопасности необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторы с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спирто-содержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окислений контактов и кристаллизации в зазорах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

50. Пинцет биполярный с плоским штекером (европейский разъем), длина 115 мм, бранши шириной 0,5мм, 310-110-05. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Пинцет биполярный изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 115 мм, бранши шириной 0,5мм

REF 310-112-05

LOT 64430

2018-12 2023-12

LED SpA Via Salsatella 40
04011 Aprila (LT) - ITALY

8 40 3 3 6 3 8 3 2 3 5 8

CE 0061


NON STERILE

115 mm 30 mm 115 mm 30 mm

QR code

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещин, изгибов или повреждение изоляции). Для получения информации о технике безопасности в области электробезопасности необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторы с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спирто-содержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окислений контактов и кристаллизации в зазорах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

51. Пинцет биполярный изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 115 мм, бранши шириной 0,5мм, 310-112-05. Фото изделия и пример маркировки

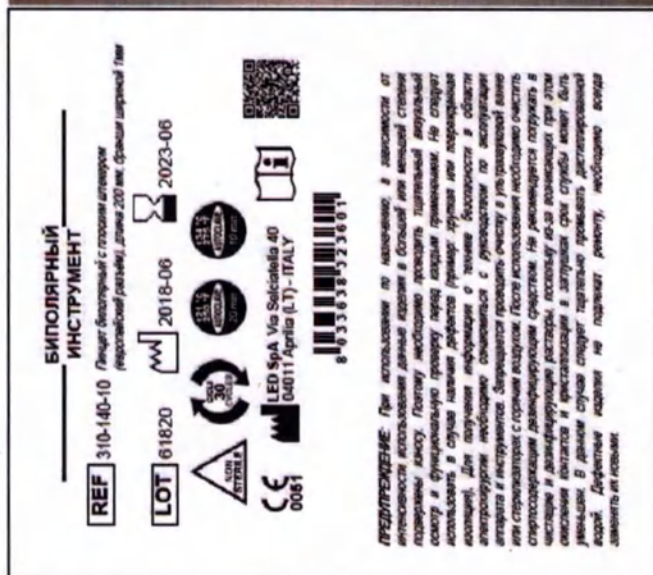

52. Пинцет биполярный с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-140-10. Фото изделия и пример маркировки



53. Пинцет биполярный с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 2мм, 310-140-20. Фото изделия и пример маркировки

БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Пинцет биполярный изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм

REF 310-142-10

LOT 61821

2018-06

2023-06

LED SpA Via Seicamella 40
04011 Aprica (LT) - ITALY

CE 0061

816336323629

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещин, сколов или повреждений изоляции). Для получения информации о технике безопасности в области электробезопасности необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструмента. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить стерилизаторах дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку может возникнуть при этом окисление контактов и кристаллизация в зазорах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дезинфицированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять на новые.

54. Пинцет биполярный изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-142-10. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Пинцет биполярный изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 2мм

REF 310-142-20

LOT 61277

2018-05

2023-05

LED SpA Via Seicamella 40
04011 Aprica (LT) - ITALY

CE 0061

816336323632

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещин, сколов или повреждений изоляции). Для получения информации о технике безопасности в области электробезопасности необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструмента. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить стерилизаторах дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку может возникнуть при этом окисление контактов и кристаллизация в зазорах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дезинфицированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять на новые.

55. Пинцет биполярный изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 2мм, 310-142-20. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REF 310-180-10 Пинцет биполярный байонетные с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм

LOT 63924 2018-03 2023-03

NON STERILE

LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

CE 0051

8 033638 323649

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторы с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окислении контактов и кристаллизации в зазорах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

56. Пинцет биполярный байонетные с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-180-10. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REF 310-180-20 Пинцет биполярный байонетные с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 2мм

LOT 64295 2019-02 2024-02

NON STERILE

LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

CE 0051

8 033638 323656

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: хрупкая или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторы с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окислении контактов и кристаллизации в зазорах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

57. Пинцет биполярный байонетные с плоским штекером (европейский разъем), длина 200 мм, бранши шириной 2мм, 310-180-20. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REF 310-182-10 Пинцет биполярный байонетные изогнутые наружу с плоским штекером (европейский разъём), длина 200 мм, бранши шириной 1мм

LOT 60834 **2018-03** **2023-03**

CE **LED SpA** Via Saccaiola 40 04011 Agolla (LT) - ITALY

8 033 638 323 663

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большой или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить регулярный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещины, изгибы или повреждение изоляции). Для получения информации о технике безопасности в области электробезопасности необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации изделия и инструкцией. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить стерилизирующим дезинфицирующим раствором. Не рекомендуется погружать при этом окисленные контакты и кристаллоиды в затупившиеся службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дезинфицирующей водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

58. Пинцет биполярный байонетные изогнутые наружу с плоским штекером (европейский разъём), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-182-10. Фото изделия и пример маркировки



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REF 310-185-10 Пинцет биполярный байонетные изогнутые внутрь с плоским штекером (европейский разъём), длина 200 мм, бранши шириной 1мм

LOT 60834 **2018-03** **2023-03**

CE **LED SpA** Via Saccaiola 40 04011 Agolla (LT) - ITALY

8 033 638 323 670

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большой или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить регулярный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (трещины, изгибы или повреждение изоляции). Для получения информации о технике безопасности в области электробезопасности необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации изделия и инструкцией. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить стерилизирующим дезинфицирующим раствором. Не рекомендуется погружать при этом окисленные контакты и кристаллоиды в затупившиеся службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть дезинфицирующей водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.

59. Пинцет биполярный байонетные изогнутые внутрь с плоским штекером (европейский разъём), длина 200 мм, бранши шириной 1мм, 310-185-10. Фото изделия и пример маркировки

61. Электрод биполярный для коагуляции швов изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм, 310-550. Фото изделия и пример маркировки

БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REF 310-550 Электрод биполярный для коагуляции швов изогнутый с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм

LOT 76538  2021-04  2026-04


CE
0051


121 °C
250 °F
20 min


134 °C
275 °F
10 min



LED SpA Via Salsicciella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY
EAN13 8033638323694

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: трещина или поврежденная изоляция). Для получения информации техники безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окислении контактов и кристаллизации в зазорах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.



60. Электрод биполярный для коагуляции швов прямой с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм, 310-510. Фото изделия и пример маркировки

БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REF 310-510 Электрод биполярный для коагуляции швов прямой с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм

LOT 74454  2020-12  2025-12


CE
0051


121 °C
250 °F
20 min


134 °C
275 °F
10 min



LED SpA Via Salsicciella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY
EAN13 8033638323687

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Поэтому необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: трещина или поврежденная изоляция). Для получения информации техники безопасности в области электрохирургии необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторах с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спиртосодержащим дезинфицирующим средством. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окислении контактов и кристаллизации в зазорах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промывать дистиллированной водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.



БИПОЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REF 310-590 Электрод биполярный для коагуляции швов изогнутый на 45°С с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм

LOT 75102  2021-03  2026-03


    

 **LED SpA** Via Salsitella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY
EAN13 8033638323700

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании по назначению, в зависимости от интенсивности использования данные изделия в большей или меньшей степени подвержены износу. Пользователю необходимо проводить тщательный визуальный осмотр и функциональную проверку перед каждым применением. Не следует использовать в случае наличия дефектов (пример: трещина или поврежденная изоляция). Для получения информации о технике безопасности в области электрокоагуляции необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата и инструментов. Запрещается проводить очистку в ультразвуковой ванне или стерилизаторы с горячим воздухом. После использования необходимо очистить спартокоагуляционную дезинфицирующую средство. Не рекомендуется погружать в чистящие и дезинфицирующие растворы, поскольку из-за возникающих при этом окисления контактов и кристаллизации в зазорах срок службы может быть уменьшен. В данном случае следует тщательно промыть диспертированную водой. Дефектные изделия не подлежат ремонту, необходимо всегда заменять их новыми.



62. Электрод биполярный для коагуляции швов изогнутый на 45°С с плоским штекером (европейский разъем), длина 200мм, 310-590. Фото изделия и пример маркировки

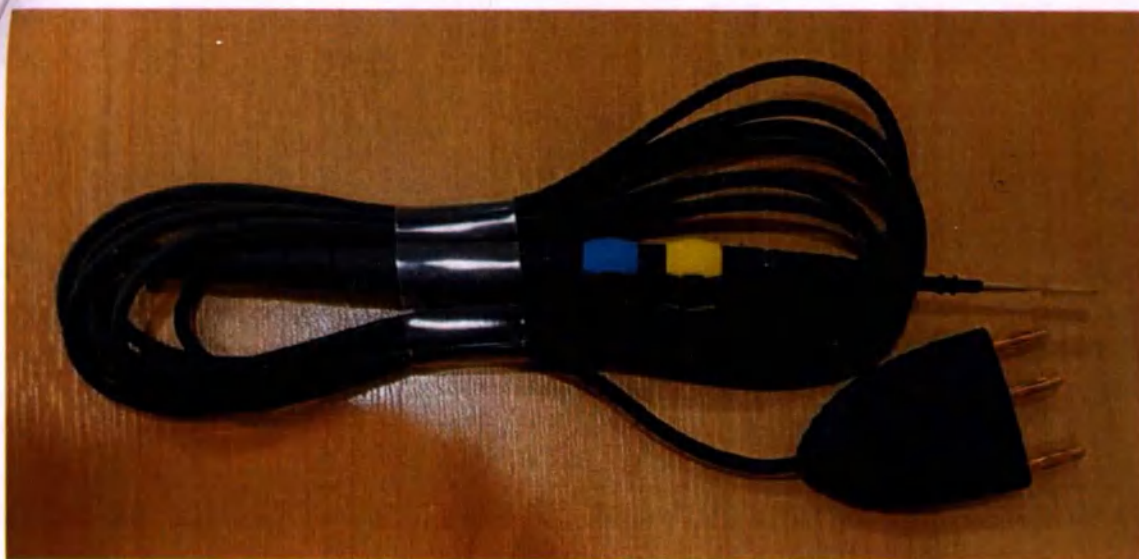

Ручка

REF 00205.00

LOT 76955

2021-06

2026-06

CE
0051

NON
STERILE

100
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

0 °C

+50 °C

20% 80%

Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug)

63. Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug), 00205.00. Фото изделия и пример маркировки



Ручка

REF	00205.40	Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем для электрода с посадочным диаметром 4мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug)
LOT	67890	
	2019-07	
	2024-07	

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

64. Ручка электрохирургическая монополярная с ручным переключателем в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – 3х контактный штекер типа «банан» 4мм (4mm 3-Banana plug), 00205.40. Фото изделия и пример маркировки



Ручка					
REF 00206.00	Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug)				
LOT 64900					
2019-01					
2024-01					
0051					
LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY		MADE IN ITALY			
0 °C +50 °C 20% 80%		8 0 3 3 6 3 8 3 2 1 2 3 2			

65. Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug), 00206.00. Фото изделия и пример маркировки



Ручка

REF	00206.40	Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением для электрода с посадочным диаметром 4мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug)
LOT	67891	
	2019-07	
	2024-07	

LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

66. Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug), 00206.40. Фото изделия и пример маркировки



Кабель

REF	00402.04	Кабель автоклавируемый для подключения монополярных инструментов M4-F2.M, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Ø4 мм, со стороны инструмента - гнездовой разъем 2-2,8 мм
LOT	72504	
	2020-01	
	2025-01	

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

+50 °C

80%

8 0 3 6 3 8 3 2 3 7 8 6

67. Кабель автоклавируемый для подключения монополярных инструментов M4-F2.M, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Ø4 мм, со стороны инструмента - гнездовой разъем 2-2,8 мм, 00402.04. Фото изделия и пример маркировки



Кабель

REF 00404.08

LOT 71642

2020-04

Совместим с аппаратами S365A / 6429A, 00401, 10904M1.20

Кабель для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стального/стального с TPE покрытием, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Jack Ø6,3мм, со стороны инструмента - разъем для подключения язычкового соединения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности указывают риск случайной электротравмы:

- Кабель должен использоваться с электрофизиологическим аппаратом и/или принадлежностями в соответствии с действующими нормами.
- Для получения информации об использовании аппарата электрофизиологического и других необходимых принадлежностей следует обратиться к инструкциям.
- Не следует допускать прямого контакта кабелей с кожей пациента, электрода и/или электродов.
- При использовании кабеля от аппарата электрофизиологического не следует нажимать на провод, необходимо брать его непосредственно за предельно короткий для подключения разъем.

ОЧИСТКА

Сразу после использования необходимо промыть проточной водой, затем погрузить на 45 минут в 2-процентный раствор общего дезинфицирующего средства.

CE 0051

LED SpA Via Salsomaggi 40
41011 Aprila (LT) - ITALY

00404-08_02 02-03-2019

68. Кабель для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стального/стального с TPE покрытием, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Jack Ø6,3мм, со стороны инструмента - разъем для подключения язычкового соединения, 00404.08. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00411.00

LOT 66009

2019-03

2024-03

Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3 м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента – плоский разъем (European Flat plug)

0051

NON STERILE


100 CYCLES

121 °C 250 °F 20 min

134 °C 275 °F 10 min



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

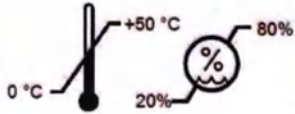

70. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3 м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента – плоский разъем (European Flat plug), 00411.00. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00412.00

LOT 63478



2018-09




2023-09



0051



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

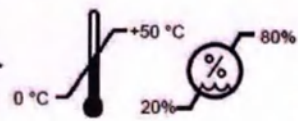

71. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа «банан» 4 мм (4mm 2-Banana plug), со стороны инструмента - плоский разъем (European Flat plug), 00412.00. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00414.00

LOT 72505

2020-01

2025-01

Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - 2х штырьковый разъем (USA 2-Pin plug)

0051

NON STERILE

100 CYCLES

121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min

134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



0 °C +50 °C 20% 80%



72. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов, длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - 2х штырьковый разъем (USA 2-Pin plug), 00414.00. Фото изделия и пример маркировки




КАБЕЛЬ

REF	00415.00	Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов END01 (F4-F2.M), длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - гнездовые разъемы 4 мм и 2-2,8 мм
LOT	72508	
	2020-01	
	2025-01	

CE
0051



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

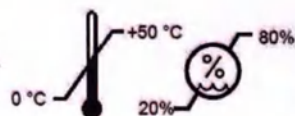

73. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов END01 (F4-F2.M), длиной 3м: со стороны аппарата - 2х контактный штекер типа Pin Distance 29mm (Ø4мм на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - гнездовые разъемы 4 мм и 2-2,8 мм, 00415.00. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

REF 00418.00

LOT 72514

2020-01

2025-01

Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов SCISS (F2.M-F2.M), длиной 3м: со стороны аппарата - штекер 2-х штырьковый 4 мм (на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - два гнездовых разъема 2-2,8 мм

0051

NON STERILE

100 CYCLES

121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min

134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



0 °C +50 °C 20% 80%



74. Кабель автоклавируемый для подключения биполярных инструментов SCISS (F2.M-F2.M), длиной 3м: со стороны аппарата - штекер 2-х штырьковый 4 мм (на расстоянии 29 мм), со стороны инструмента - два гнездовых разъема 2-2,8 мм, 00418.00. Фото изделия и пример маркировки

Генеральный директор

ООО «МедМед Корпорэйшн»

Л. В. Гижинская

Прошито и пронумеровано

46 (сорок шесть)

листа (ов).

