



Руководитель группы

ООО «Сименс Здоровоохранение»

И.И. Левитский


«06» февраля 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Система ультразвуковая диагностическая ACUSON P500 с принадлежностями»

Система ультразвуковая диагностическая ACUSON P500 с принадлежностями
Базовый блок:



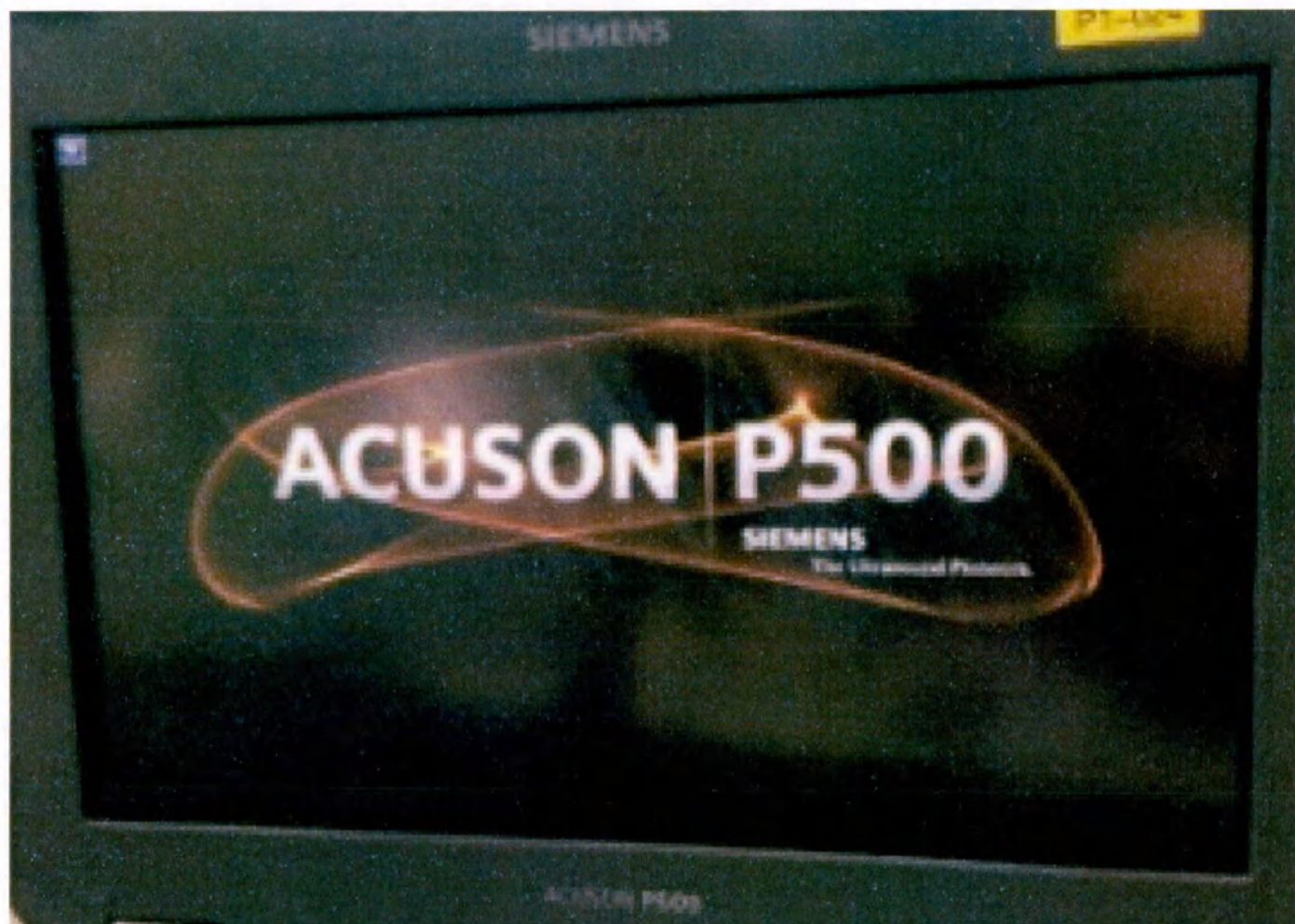





4. Кабель электропитания



5. Простая тележка



6. Простая тележка с универсальным видео конвертером



7. Автоматизированная тележка




8. Автоматизированная тележка с универсальным видео конвертером



9. Защитные чехлы, нестерильные



10.Защитные чехлы, стерильные

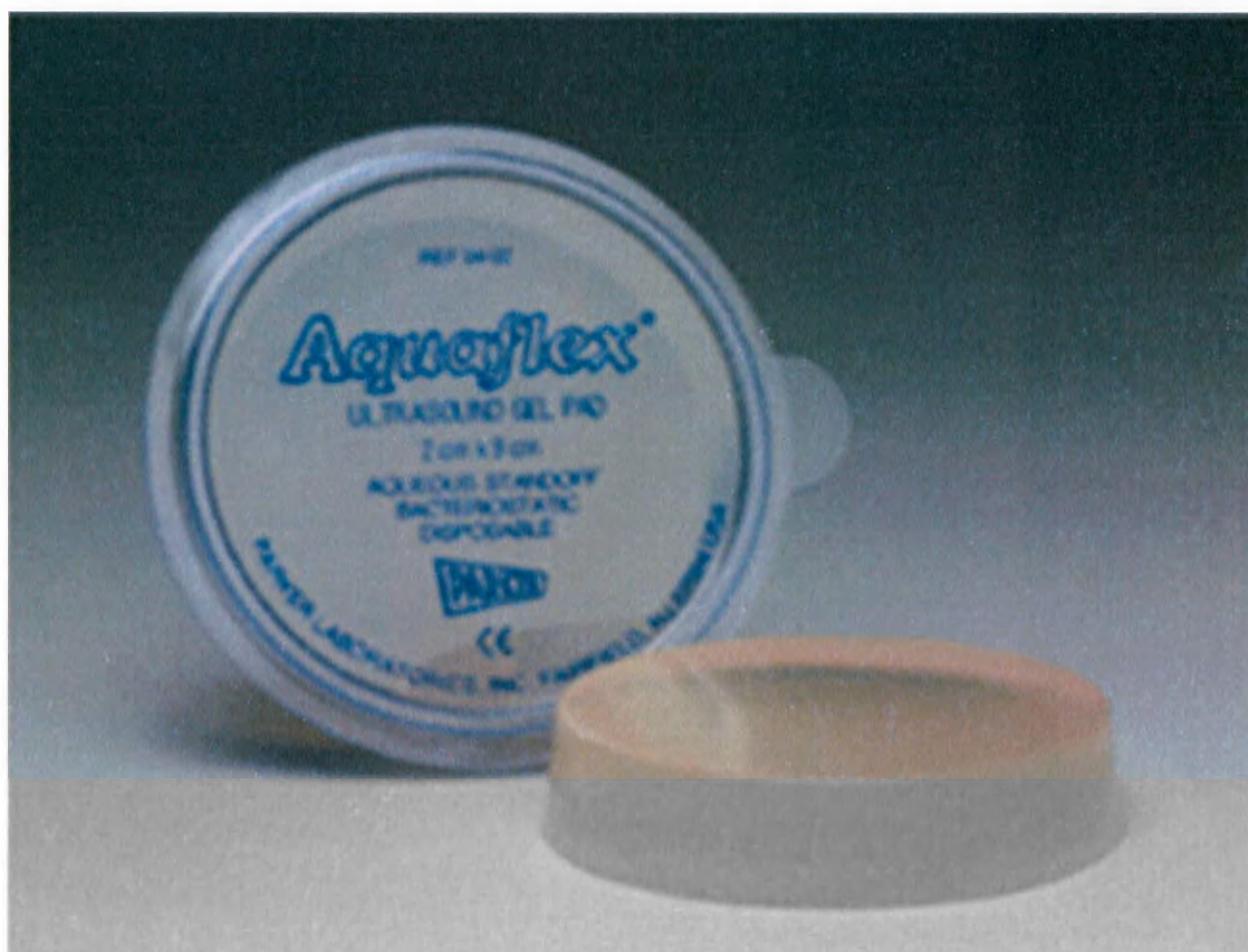

11. Одноразовая гелевая прокладка



12. Датчик CH5-2 конвексный для абдоминальных и акушерско-гинекологических исследований



13. Датчик P4-2 фазированный для кардиологических, абдоминальных и акушерских исследований



14. Датчик P8-4 фазированный для кардиологических и абдоминальных исследований у детей



15. Датчик ЕС9-4 внутривлагалищный для ректо-вагинальных исследований




16. Датчик VF10-5 линейный для исследования сосудов и поверхностно-расположенных органов



17. Датчик VF13-5 линейный для исследования сосудов и поверхностно-расположенных органов



18. Датчик VF16-5 линейный для исследования сосудов и поверхностно-расположенных органов

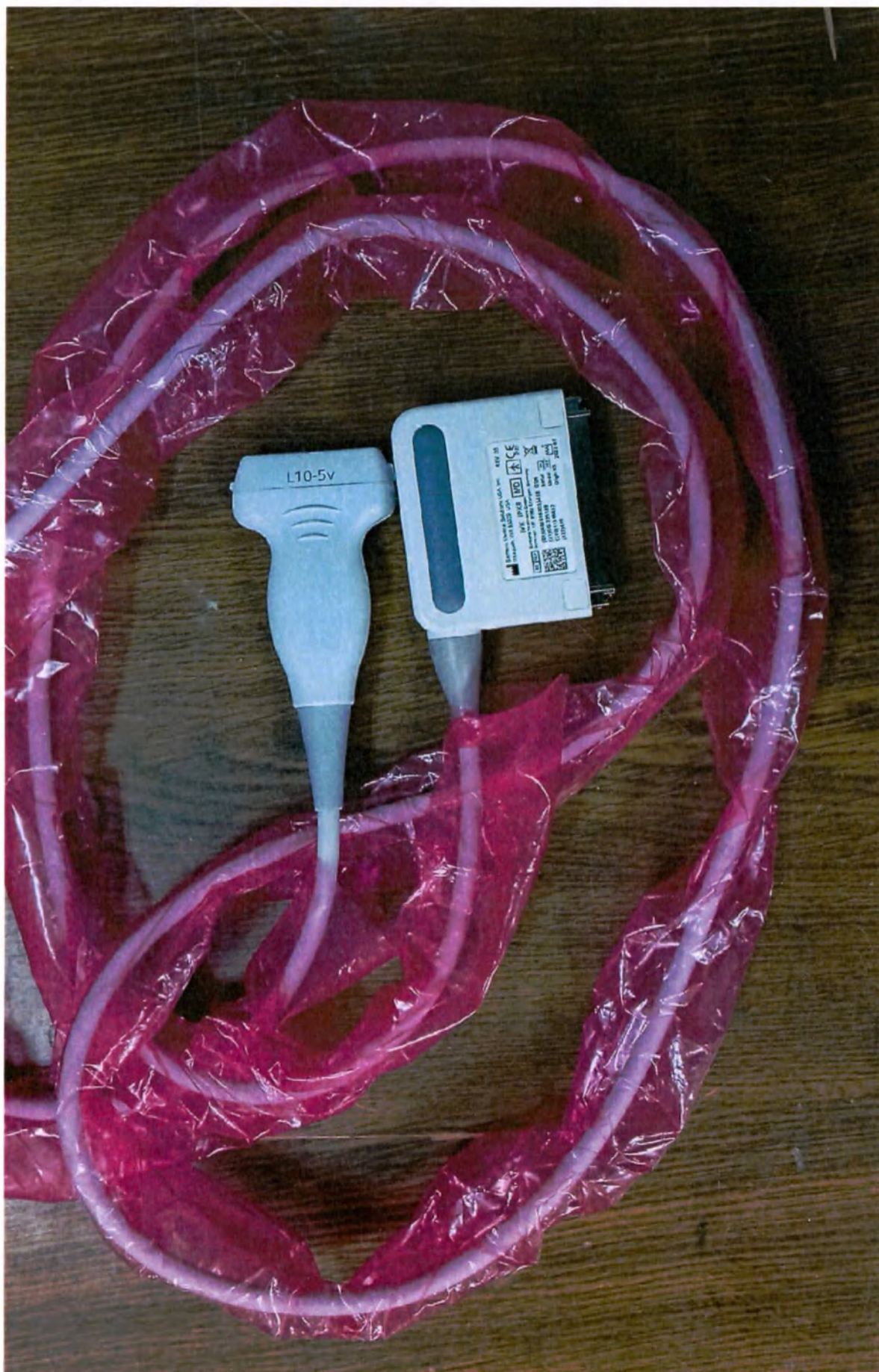


19. Датчик L10-5v линейный для исследования сосудов и поверхностно-расположенных органов




20. Датчик непрерывно-волновой CW2



21. Датчик непрерывно-волновой CW5

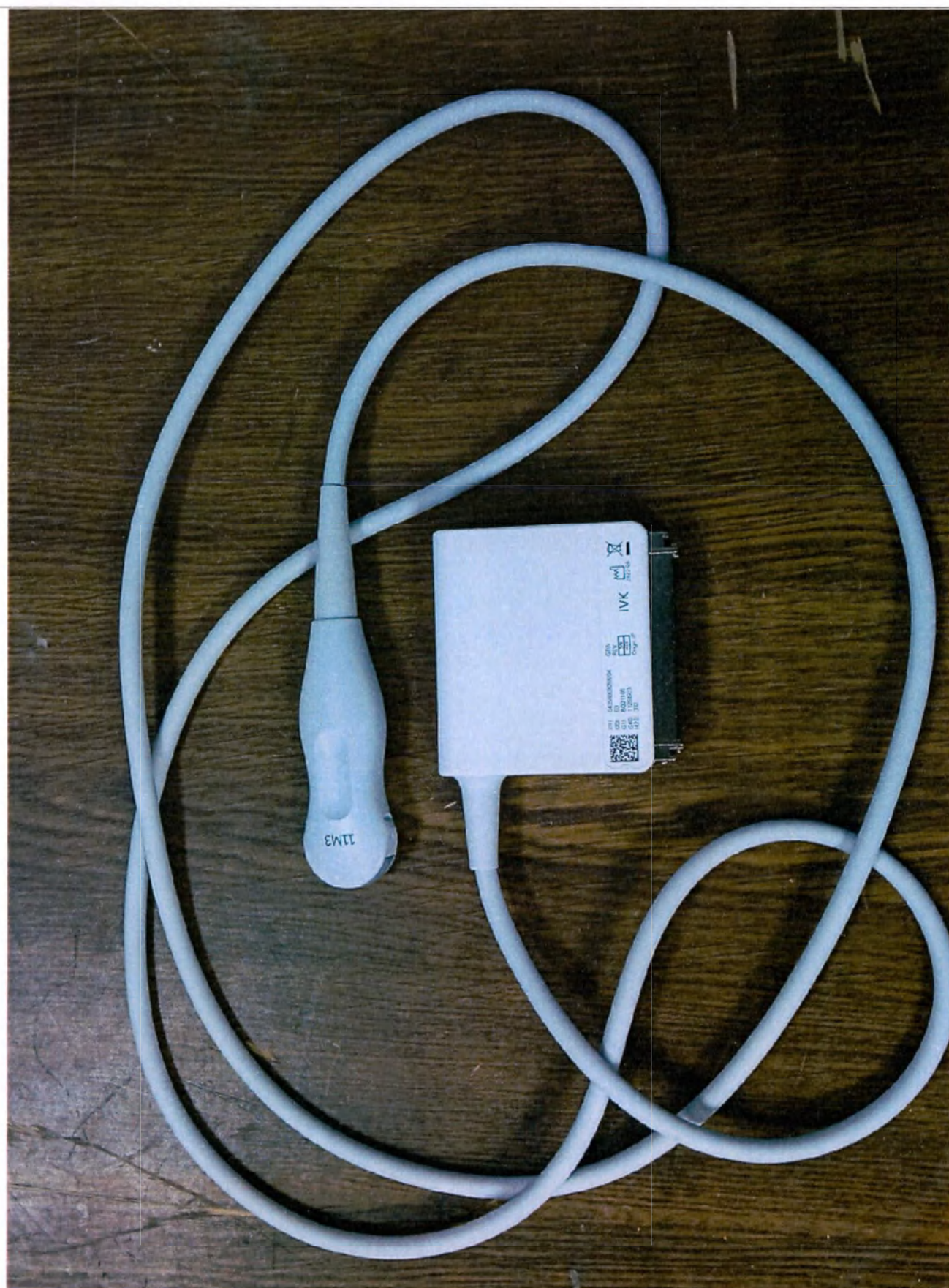

22. Датчик 11M3 микроконвексный для педиатрических исследований

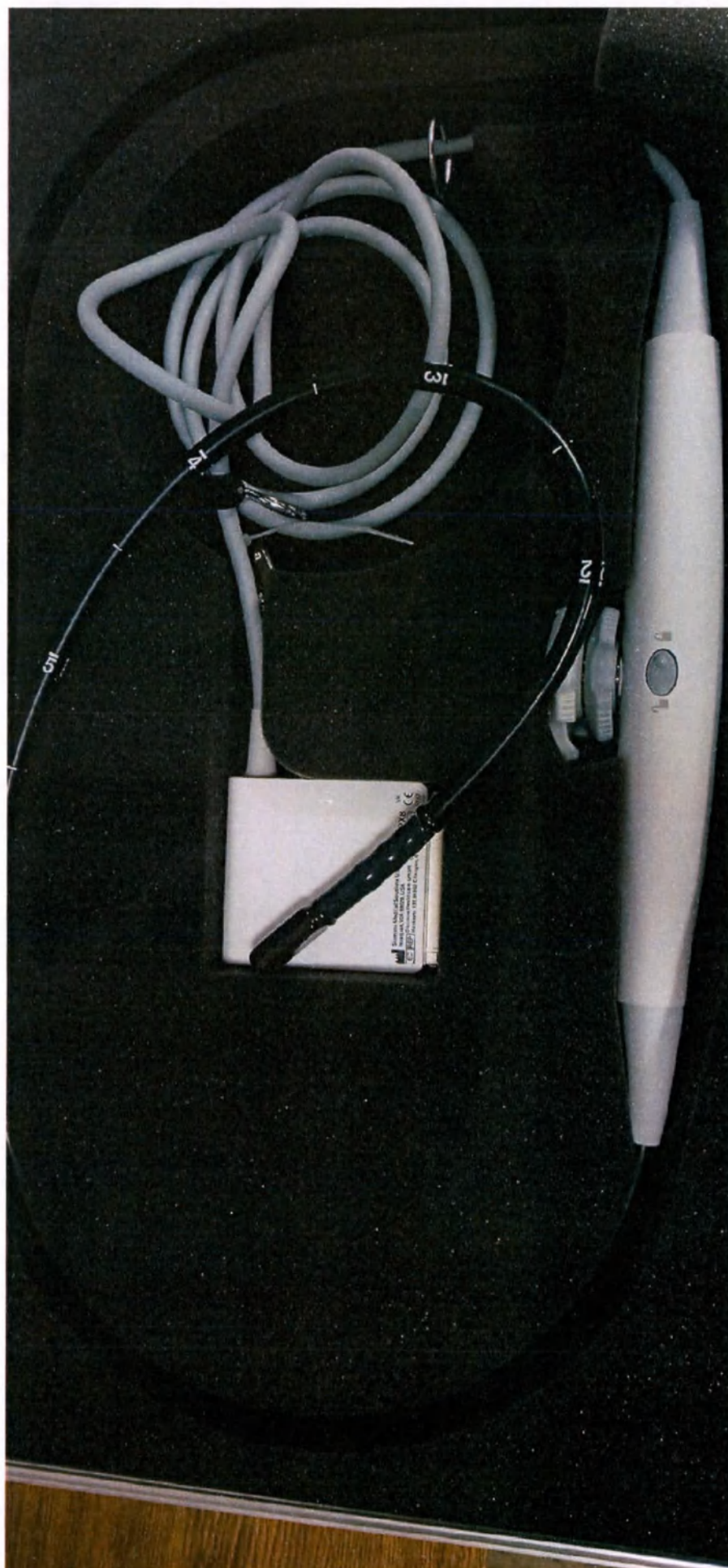

24. Датчик 5VT чреспищеводный



ACUSON P500


**Диагностическая ультразвуковая система
Инструкция по эксплуатации**




Siemens Medical Solutions USA, Inc.

11575708-ABS-001-01-01


Принадлежности:

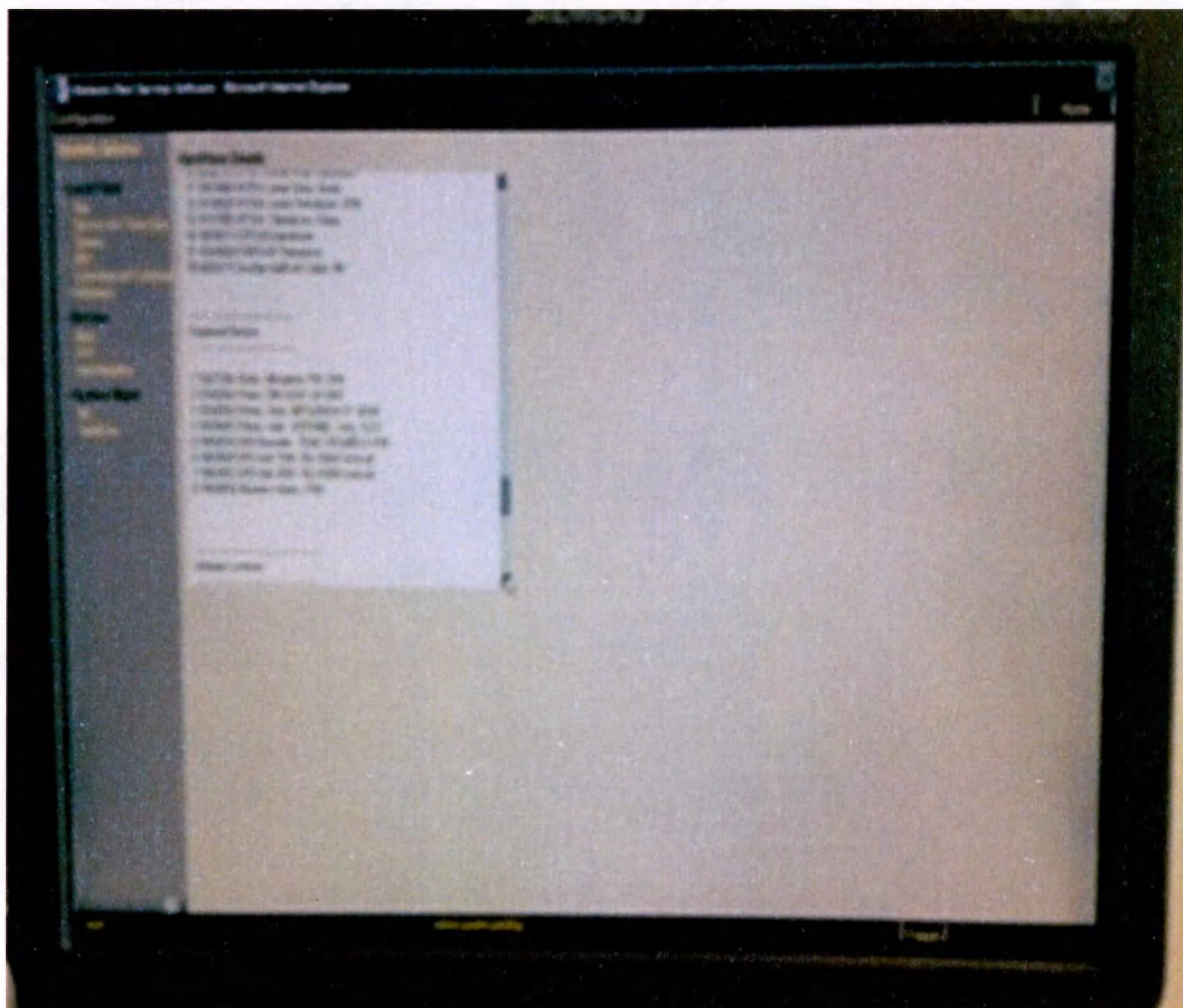


1. Лицензионный ключ для функции беспроводной передачи данных.

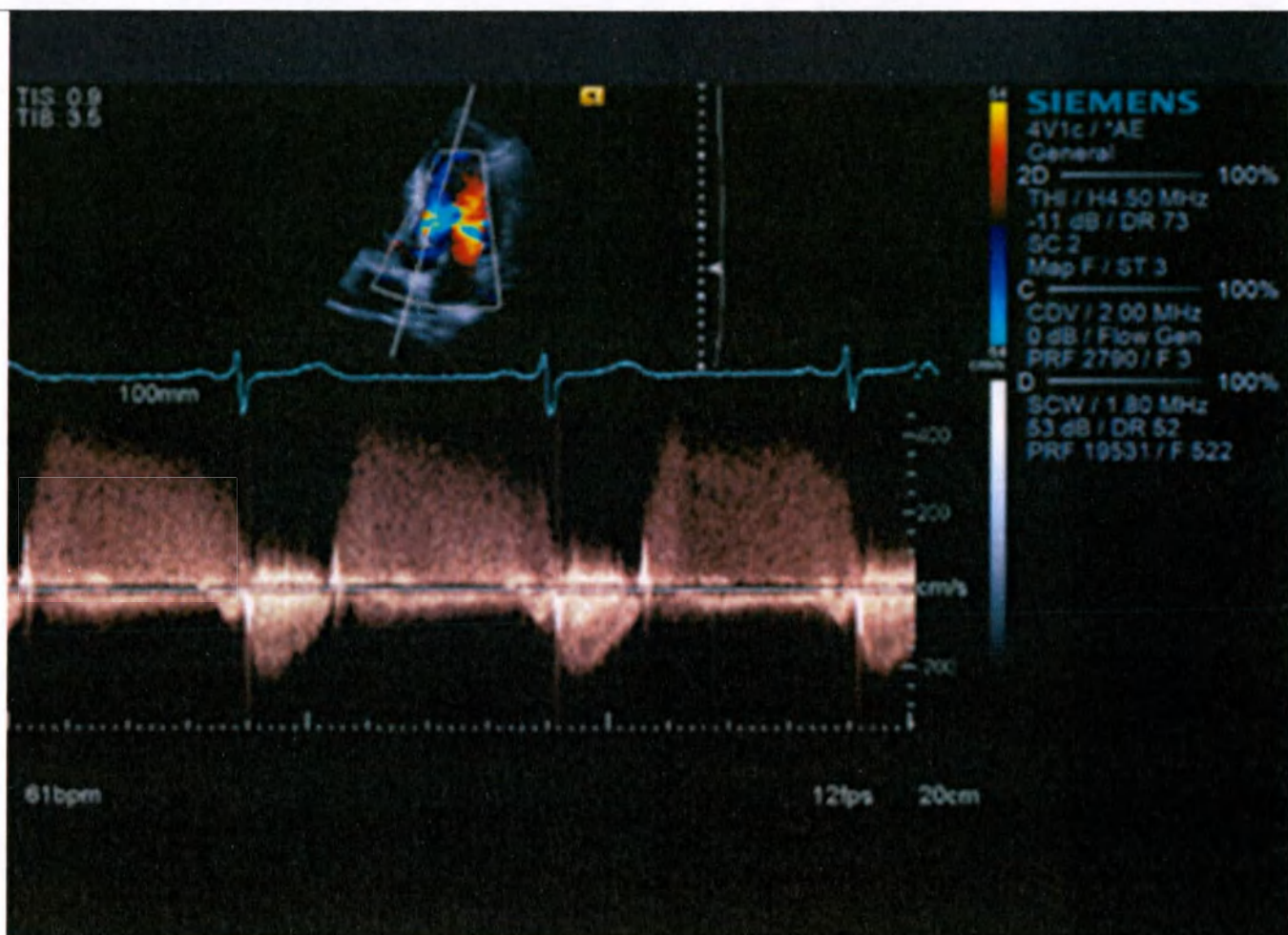


2. Лицензионный ключ для функции непрерывно - волнового доплера.

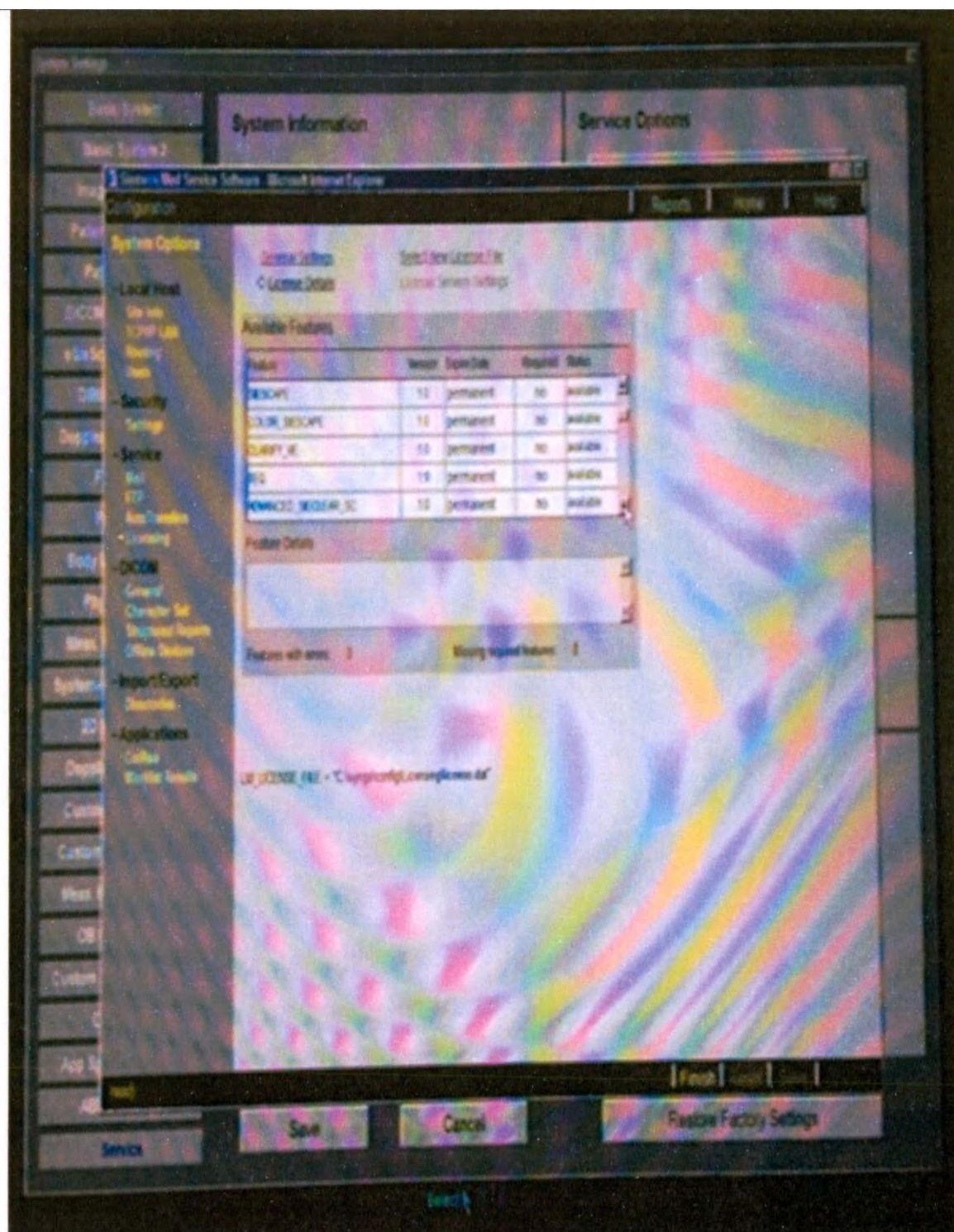

3. Лицензионный ключ для функции панорамной визуализации.

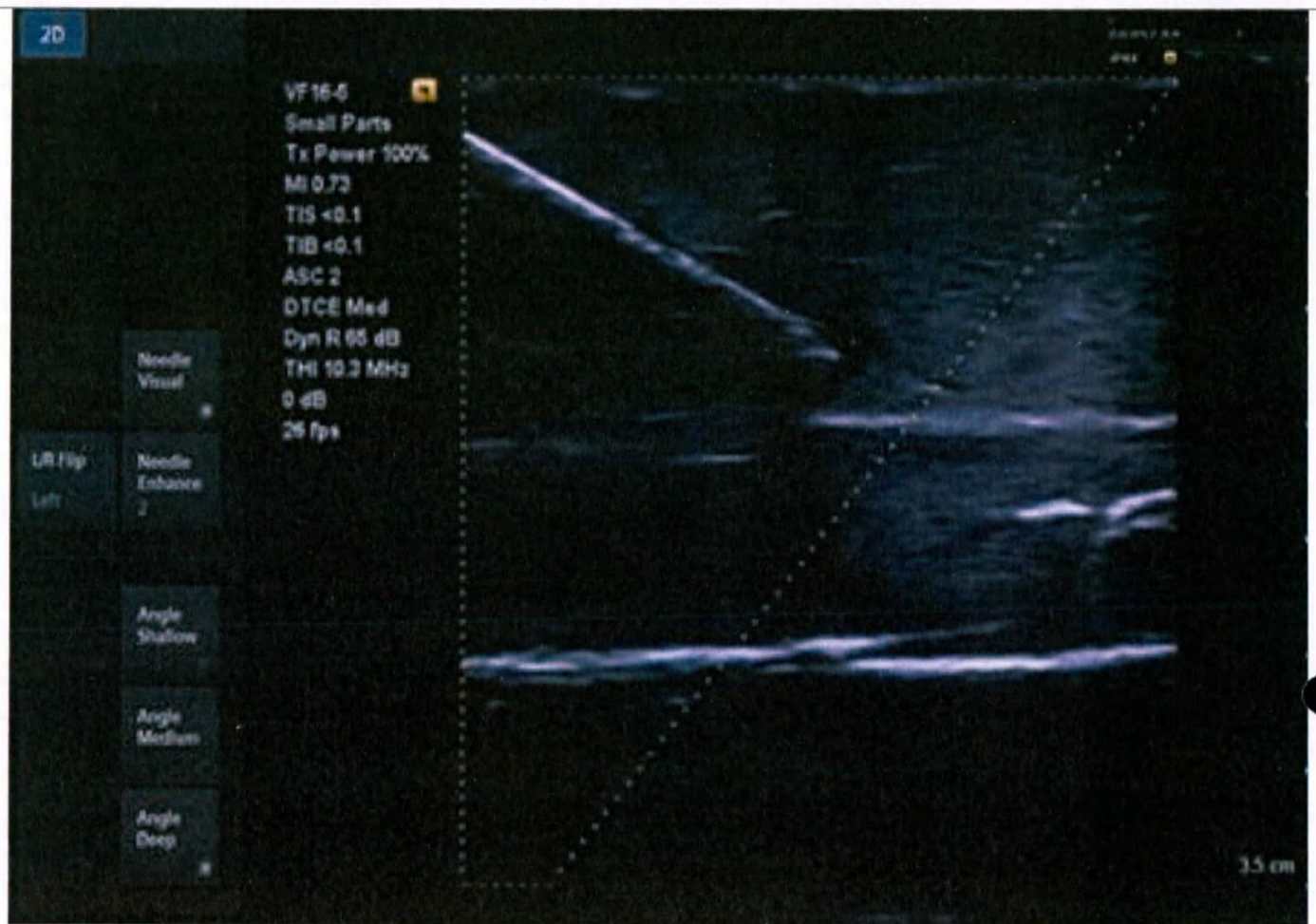

4. Лицензионный ключ для функции четкой визуализации иглы.

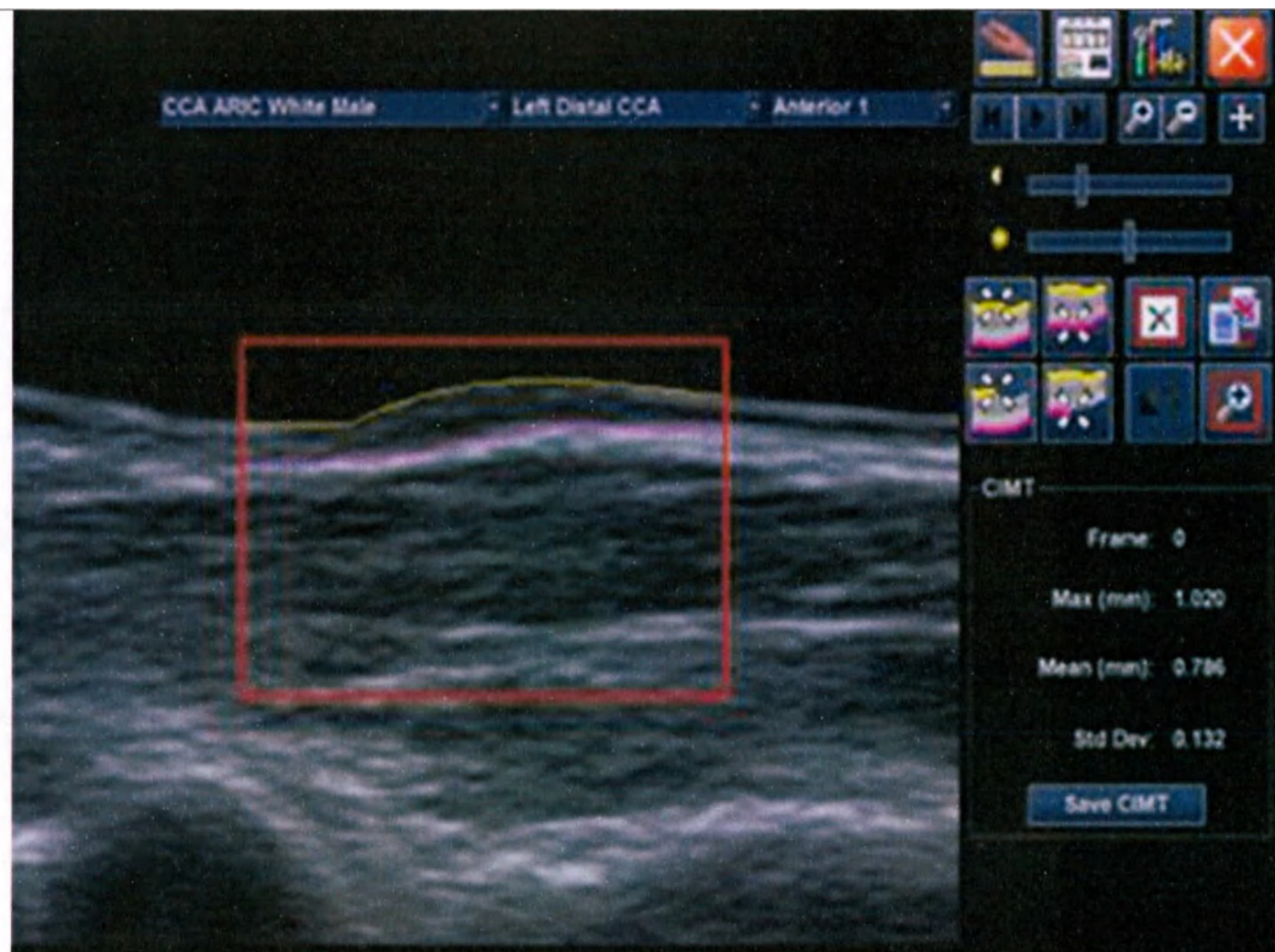

5. Лицензионный ключ для функции автоматического обнаружения границ и количественного анализа толщины интима-медиа сонных артерий.


ACU10F

12:55:25 PM 2/26/2010

10.02.26-12:20:20-STD-1.3.12.2.110...

TIS: 1.1


TIB: 1.1

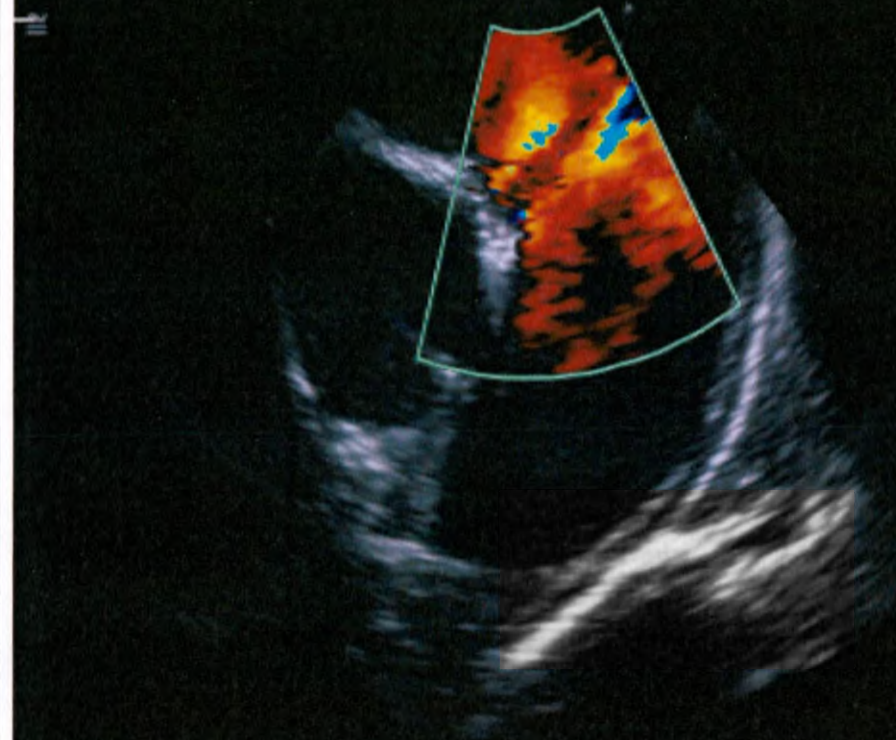


SIEMENS
Acu10F / *ICE
Gen
2D 100%
GEN / 7.00 MHz
9 dB / DR 65
SC Off / DTCE M
Map L / ST 2
C 100%
CDV / 5.00 MHz
2 dB / Flow Gen
PRF 2790 / F 2

38fps 8cm

6. Лицензионный ключ для функции внутрисердечной эхографии.

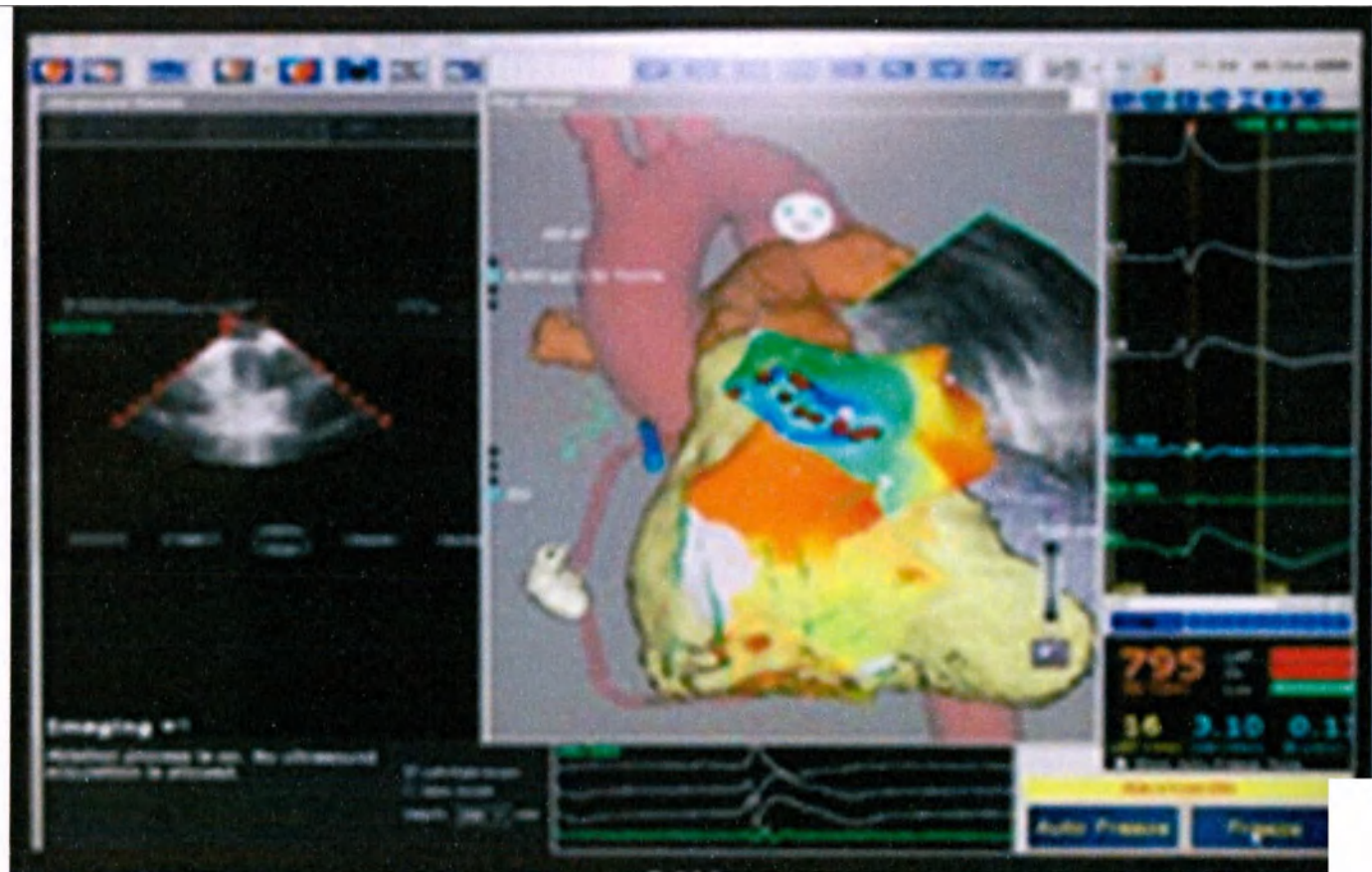

7. Лицензионный ключ для коммуникационного пакета CartoSound для внутрисердечных исследований.

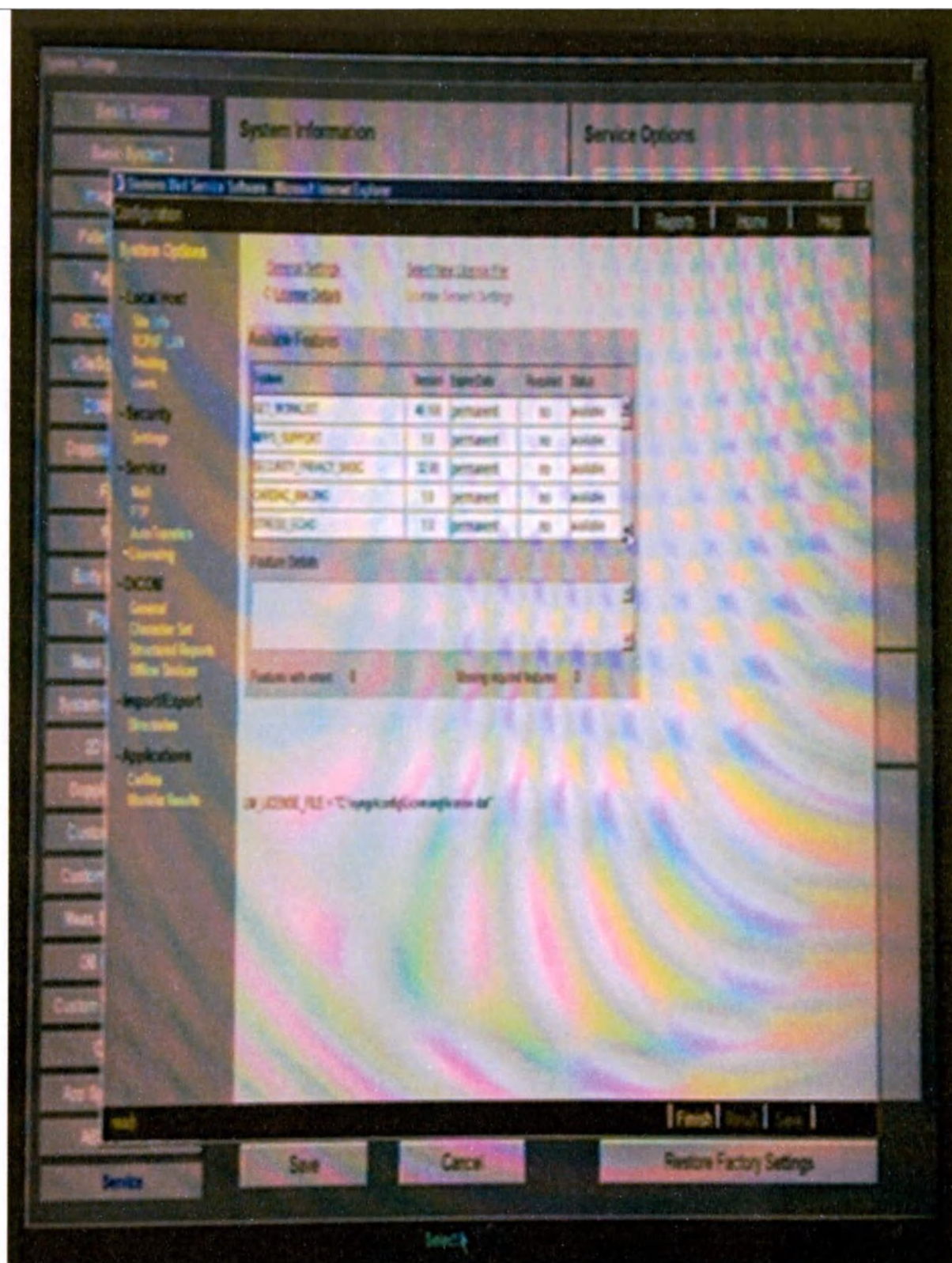



Preset

- General 1
- General 2
- Peripheral
- Customize Keys
- Display
- Exam Configuration
- User-Defined Exam List
- Text Annotation
- Pictogram List
- M & R Configuration
- Summary
- Service
- Stress Echo
- SieScape
- CAI
- Wireless
- DICOM**
- DIMAQ Utility
- Clip Capture
- Network Export
- Authorization
- Archive
- Printer

DICOM

Local Host | Storage Server | Worklist Server | MPPS Server | B/W Printer | Color Printer | Query/Retrieve |

Local Host ☒ Show network status

Alias: Default

AE Title: Default

Host Name: Default

MAC Address: 00-19-0F-23-2C-0E

New Edit Delete

☒ DHCP

☐ Mapping Application

☒ Fixed IP address

IP Address: 192 168 0 1

Subnet Mask: 255 255 255 0

Default Gateway: 0 0 0 0

Media Type: HardwareDefault

Duplex Mode: HardwareDefault

Save Cancel

Settings

General 1
 General 2
 Peripheral
 Customize Keys
 Display
 Exam Configuration
 User-Defined Exam List
 Text Annotation
 Program List
 M & R Configuration
 Summary
 Service
 Stress Echo
 SieScape
 CAI
 Wireless
 DICOM
 DINAQ Utility
 Clip Capture
 Network Export
 Authorization
 Archive
 Printer

Local Host | Storage Server | Modbus Server | MPPS Server | B/W Printer | Color Printer | Query/Retrieve

Storage Server ☐ Uses Compression

SS_AE

AE Title SS_AE

IP Address 192 168 0 3

Port Number 5104

Ping and Echo Timeout in seconds 10

Apply Cancel Ping Echo

☒ Advertise to DICOM ☐ Store During Exam ☒ Store At End Of Exam

☒ After Every Image is Stored ☒ After All Images are Stored

Number of Times to Retry Failure 2

Seconds Between Each Retry 30

Write Timeout in Seconds 30

Connect Timeout in Seconds 30

Image Format Automatic ☒ Send SR

☒ No Monochrome conversion

☐ Store all images as Monochrome

☐ Store all images and clips as Monochrome

Cancel

General

General1
General2
Predefined
Customized View
Display
Exam Configuration
User Defined Exam List
Technician
Physician List
W & W Configuration
Summary
Series
Series List
Settings
OK
Cancel
DICOM
DICOM Data
DICOM Caption
Network Support
Application
Archive
Print

DICOM

Local Host: Storage Server / Backup Server / RPT Server / W & W Server / User Profile / Query Function

Storage Server: ☒ Use Connected

Host:
 Port:
 Path:
 Request/Response Timeout in seconds:

☒ Store Images in DICOM ☒ Store Series Data ☒ Store DICOM Data

☒ Store Images in DICOM ☒ Store Series Data

Number of Images in Series:
 Number of Series in Study:
 Max. Images in Series:
 Max. Series in Study:
 Max. Images in Series:
 Max. Series in Study:

Image Format: ☒ Store in DICOM

☒ No Compression
☒ Store Images as Compressed
☒ Store Images with Original Resolution

Siemens

DCOM

Local Host / Image Server / Study Server / MPP / Server / VDI Printer / Data Printer / Query Printer

Image Server / ☐ Use Combined

Host: 192.168.1.1

Host Name: 192.168.1.1

Port Number: 1024

Request Data Timeout in seconds: 5

☐ Use DICOM / ☐ Use Query / ☐ Use DICOM / ☐ Use Query

☐ Use DICOM / ☐ Use Query / ☐ Use DICOM / ☐ Use Query

Number of Images in Study: 1

Seconds Between Study Sets: 5


Max Timeout in Seconds: 5


Cancel Timeout in Seconds: 5

Image Format:



☐ Use DICOM / ☐ Use Query / ☐ Use DICOM / ☐ Use Query

☐ Use DICOM / ☐ Use Query / ☐ Use DICOM / ☐ Use Query

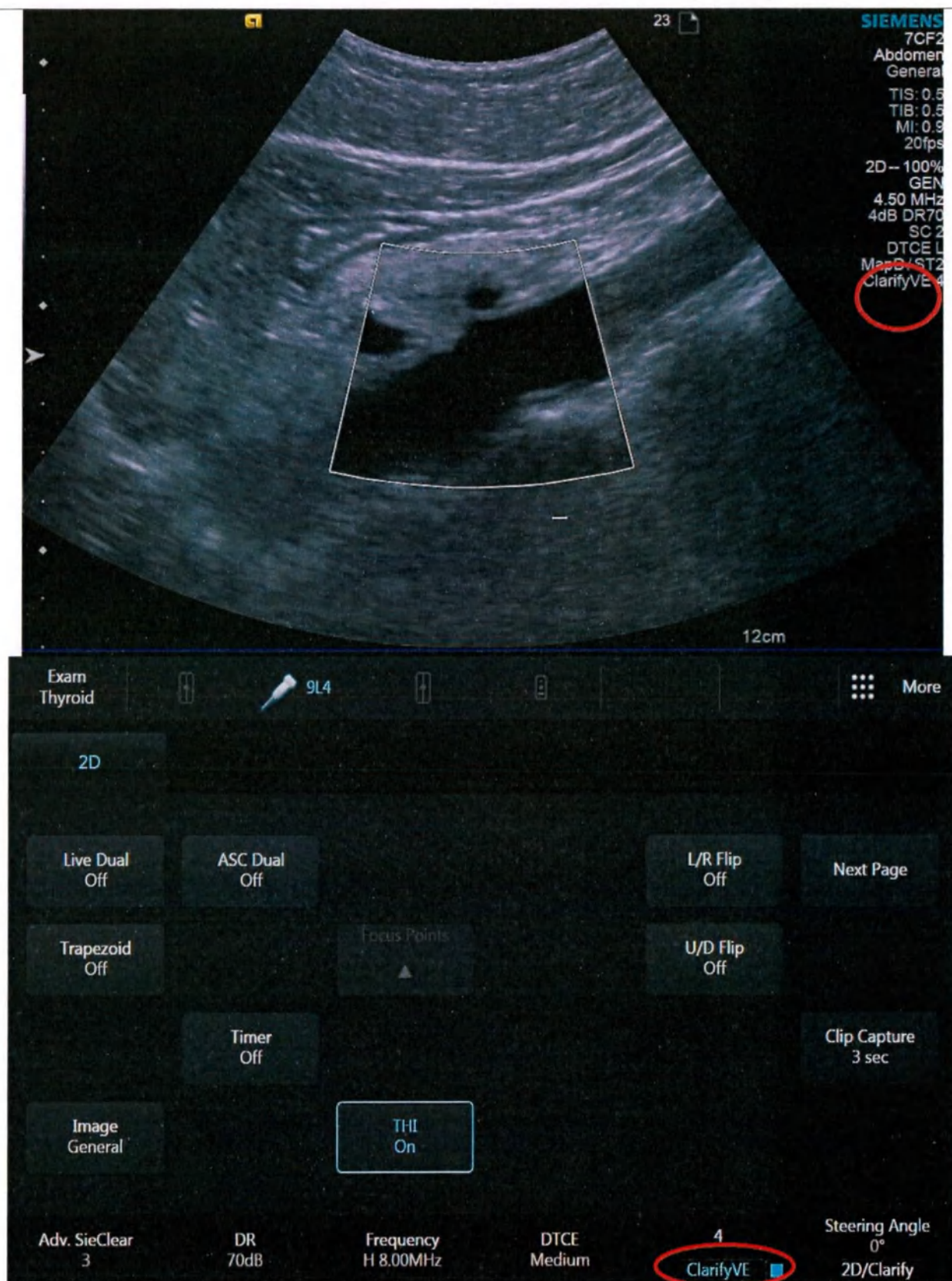

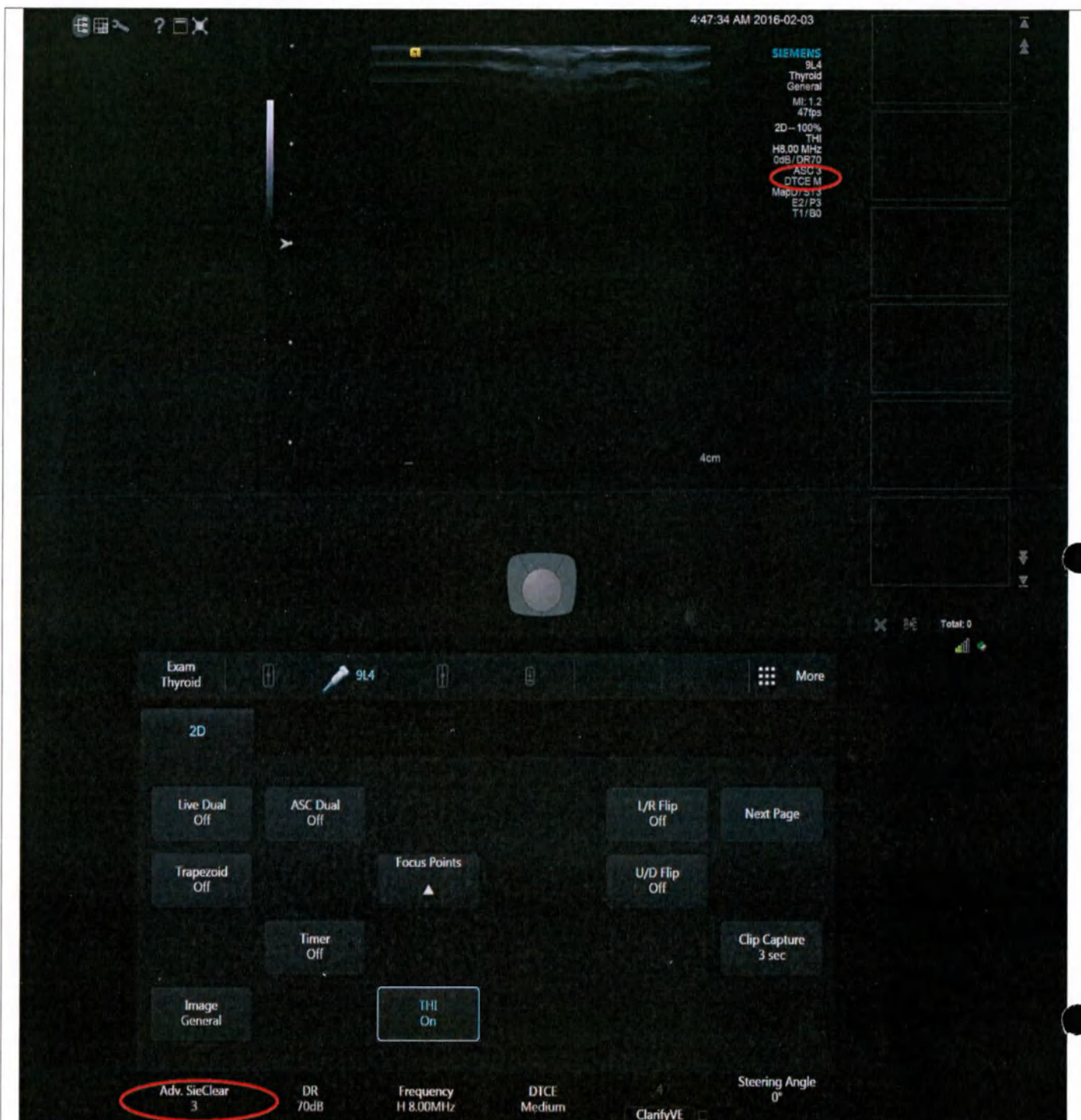

16. Лицензионный ключ для технологии пространственного компаунда для снижения зернистости и повышения дифференциации тканей на изображении.

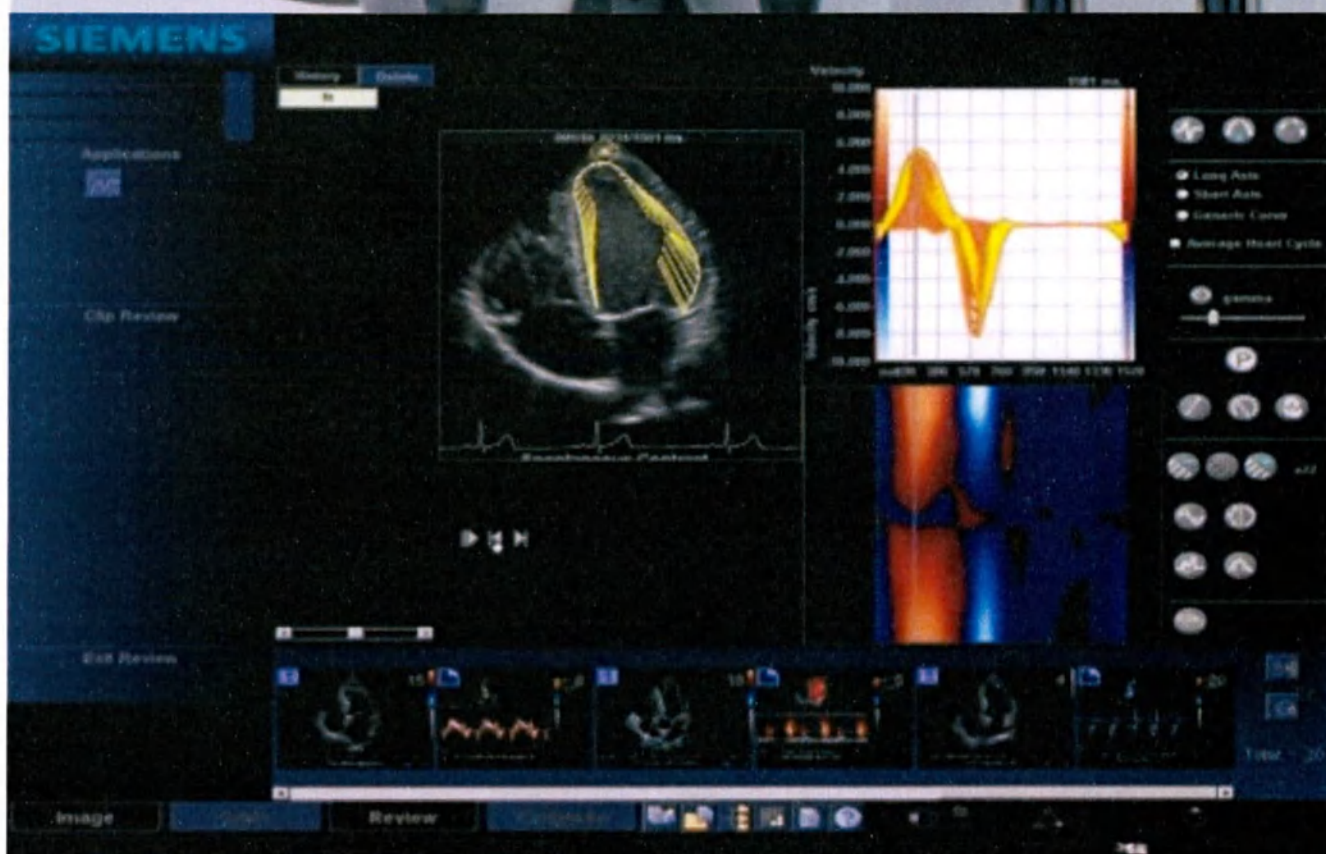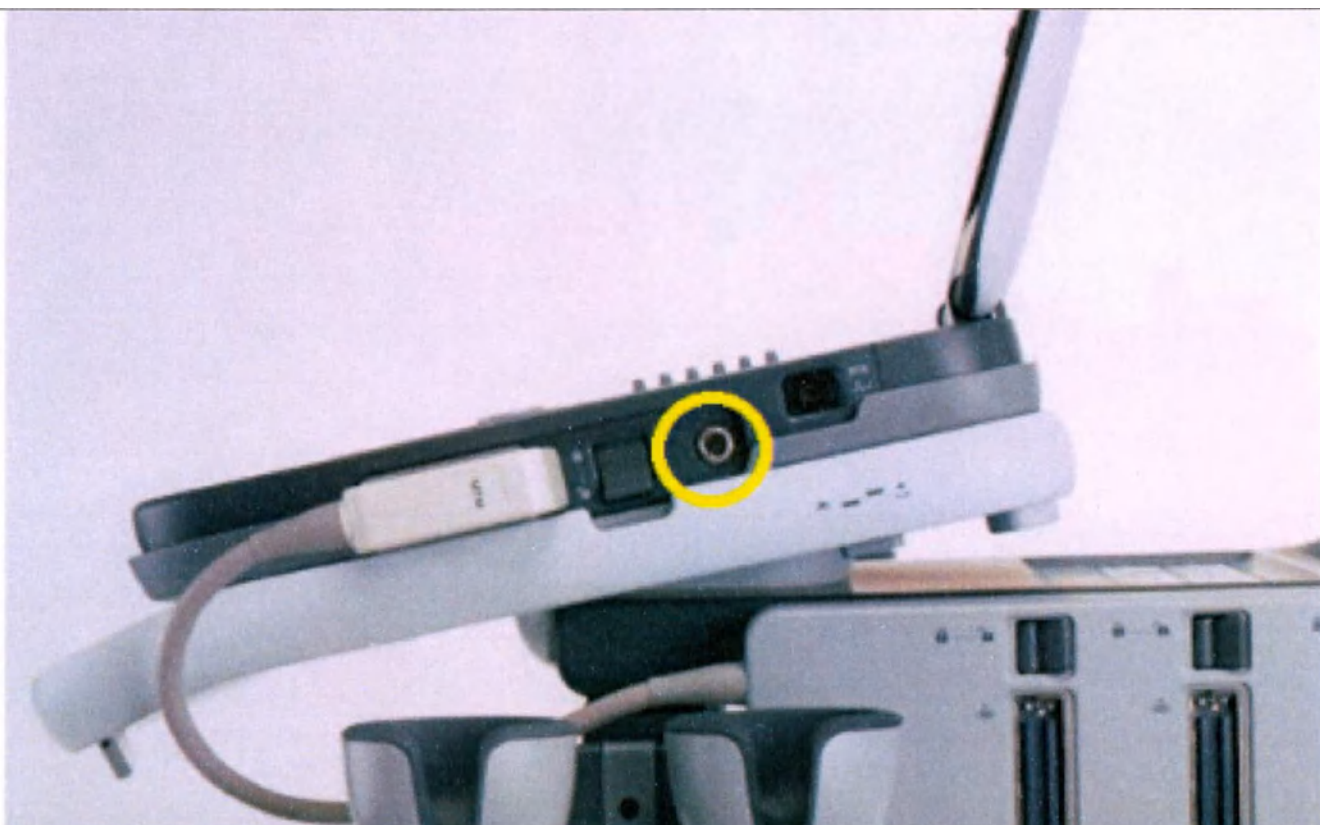

17. Модуль физиологический с лицензионным ключом для активации функции ЭКГ.



18. Кабель ЭКГ (европейский стандарт на три отведения)



19. Дополнительный соединительный адаптер ЭКГ для подсоединения ультразвуковой системы к периферийному оборудованию



20. Набор аксессуаров для системы удаленного сервисного обслуживания, в составе:


- наушники;
- микрофон.



21. Устройство для удаленного управления системой




22. Ножной переключатель

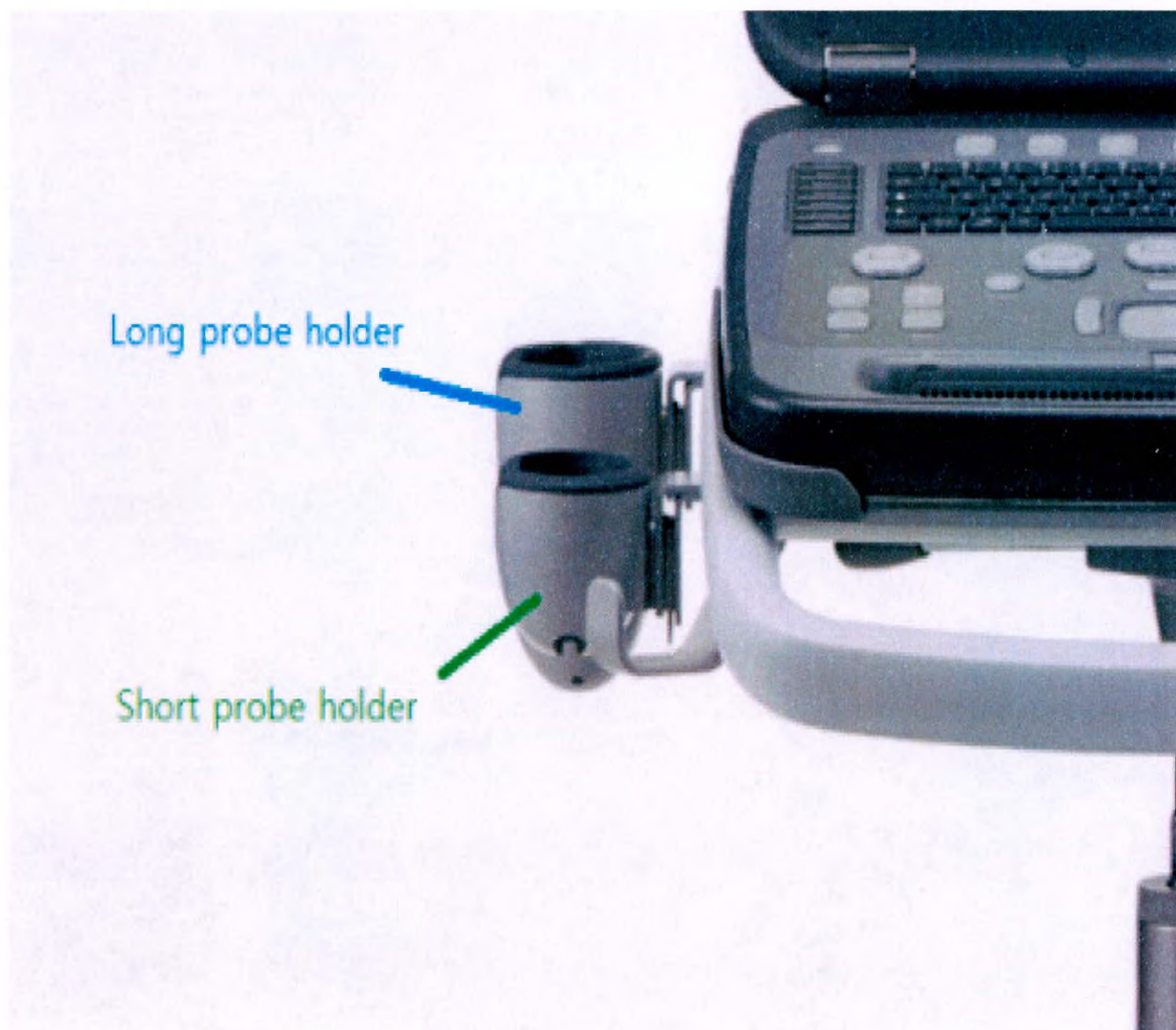

23. Держатель для датчиков



24. Полка для принтера на простой тележке

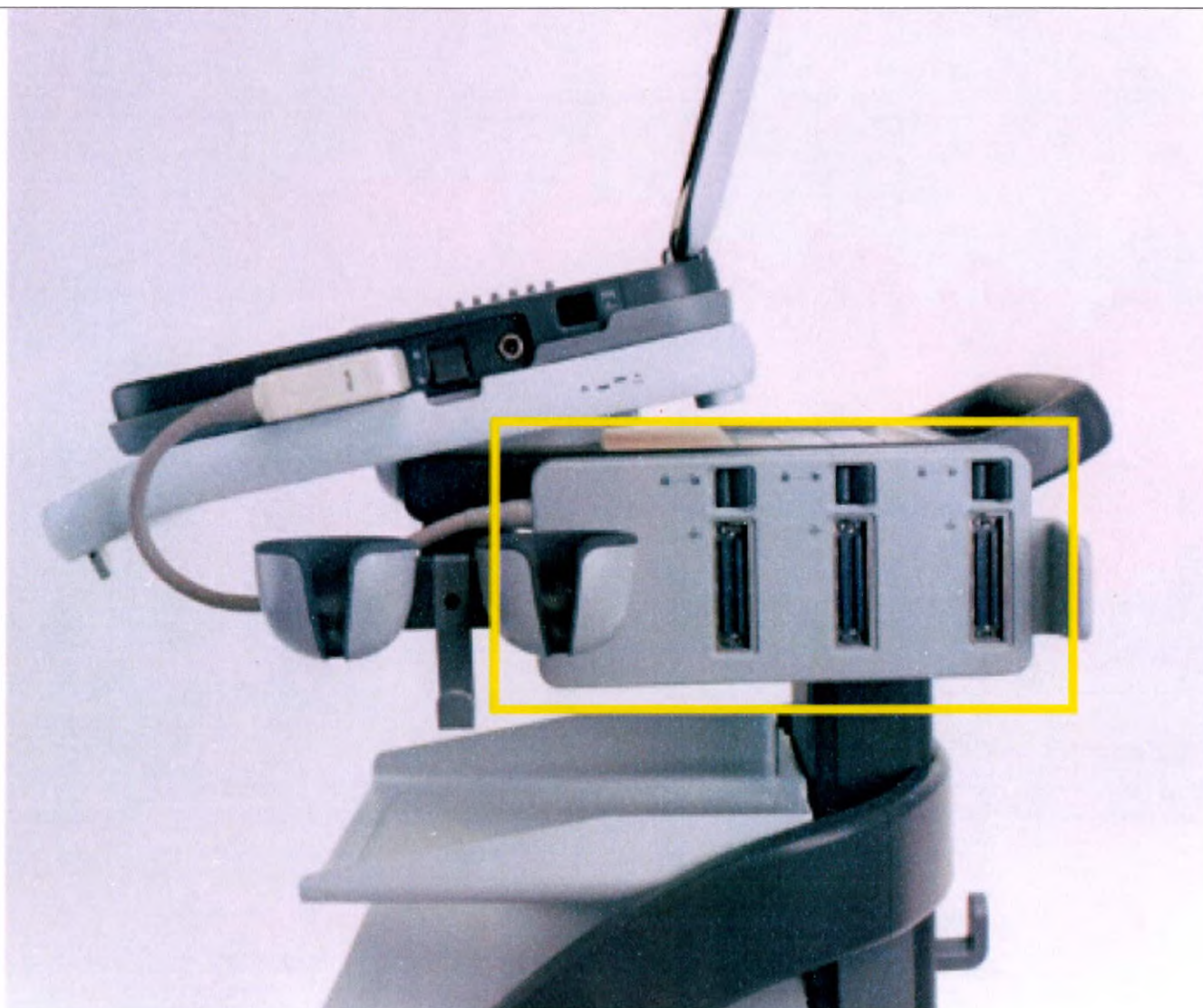

25. Мультимодуль для подключения датчиков




26. Черно-белый видеопринтер







28. Цифровой видеоманитофон

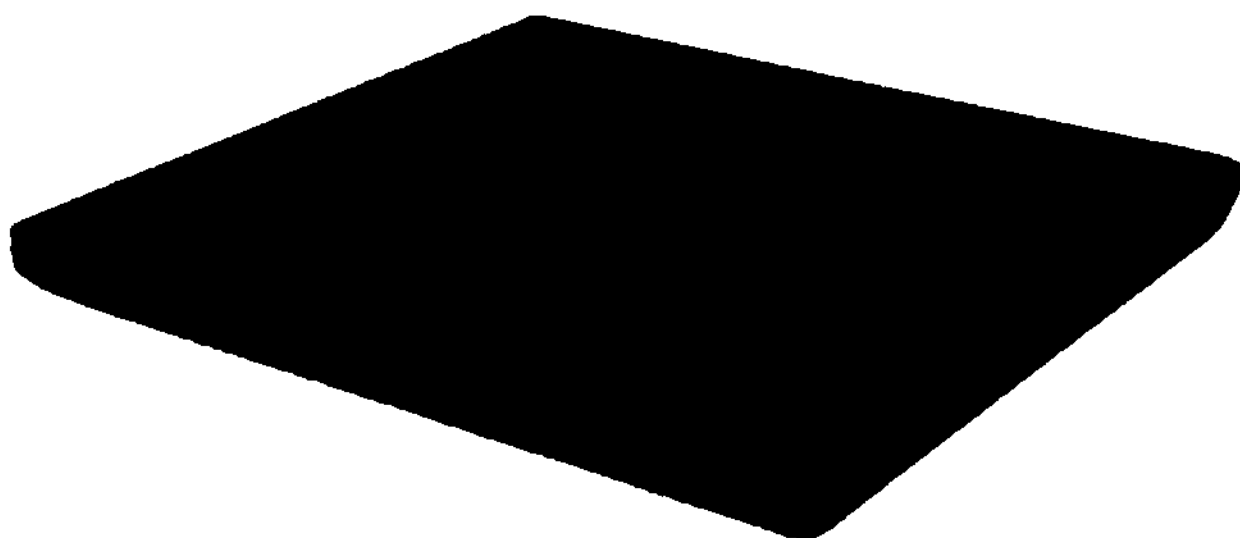

29. Внешний оптический привод DVD-RW

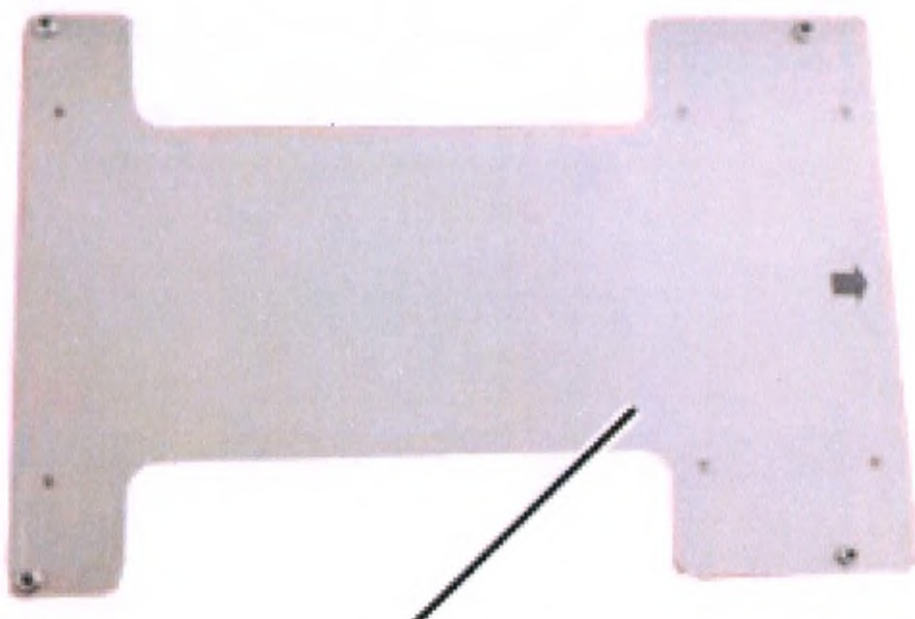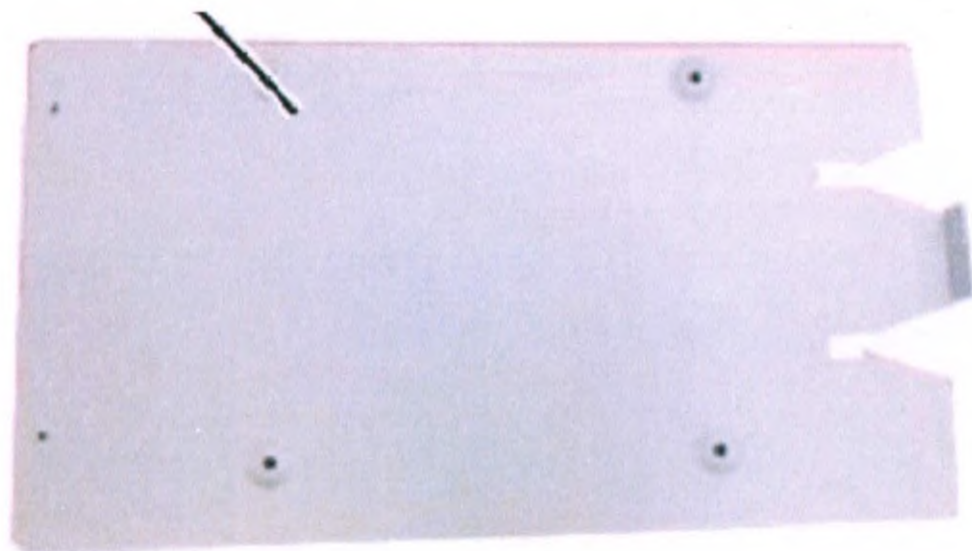



31. Кабель электропитания периферийного оборудования





32. Бумага для черно-белого видеопритера



USE OF CLEANING SHEET

When the Thermal head is dirty with dust, etc., white spots or stripes may appear on the print. In this case, clean the Thermal head by the following procedure BY USING THE SUPPLIED CLEANING SHEET.

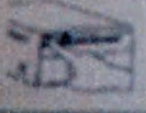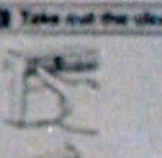1 Turn on the power.  Press the POWER switch on the rear panel to turn on the power.	2 Close the door.  Close the door without taking out the cleaning sheet.
3 Open the door.  - Press the OPEN button. - The door opens.	4 Press the FEED button.  Keep pressing the FEED button until you hear a beep.
5 Insert the cleaning sheet.  Cleaning sheet Roll the cleaning sheet and install into the slot.	6 Take out the cleaning sheet.  - Open the door. - Take out the cleaning sheet. - Do not pull out the cleaning sheet while the door is closed.
 Red mark Print roller Cleaning sheet Adjust the red mark on the cleaning sheet parallel to the print roller.	7 Repeat the steps 5 - 6 by 2 or 3 times, and print 1-2 sheets to verify the cleaning effect.

CAUTION


- It is recommended that after printing 10 rolls of paper the unit be cleaned using the supplied cleaning sheet.
- If the symptom of the dirty head is not corrected even after cleaning, print on waste paper. Contact your dealer.
- Do not put the finger into the cleaning sheet while the door is closed. This may cause serious damage to the unit.
- Never use other cleaning sheets. It may cause damage to the thermal head.
- This cleaning sheet should be used only for cleaning the thermal head. Do not use it for other purposes.




34. Адаптер иглопроводника, к датчику VF16-5




35. Адаптер иглопроводника к датчику L10-5v

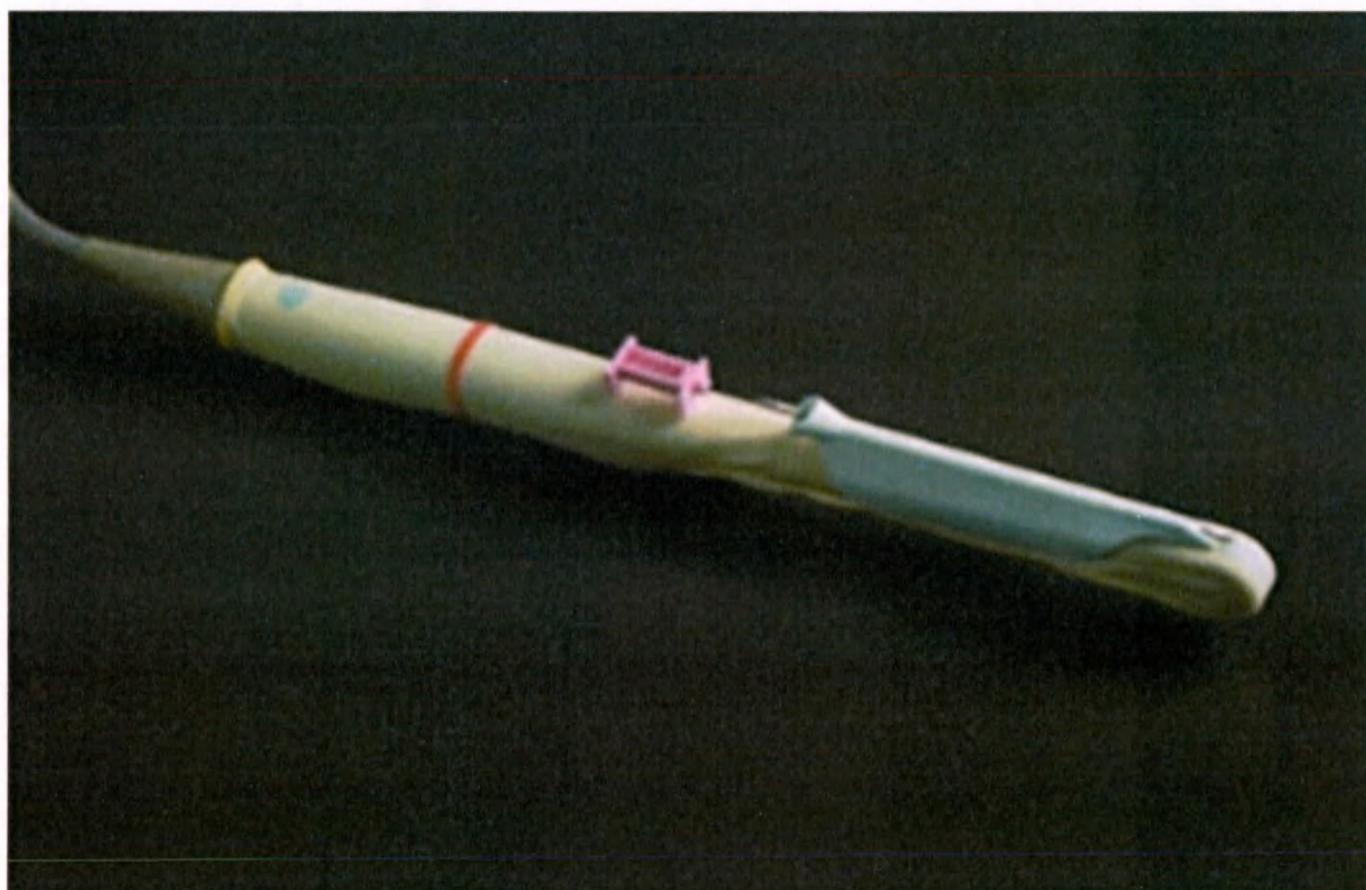


36. Адаптер иглопроводника, одноразовый, к датчику ЕС9-4

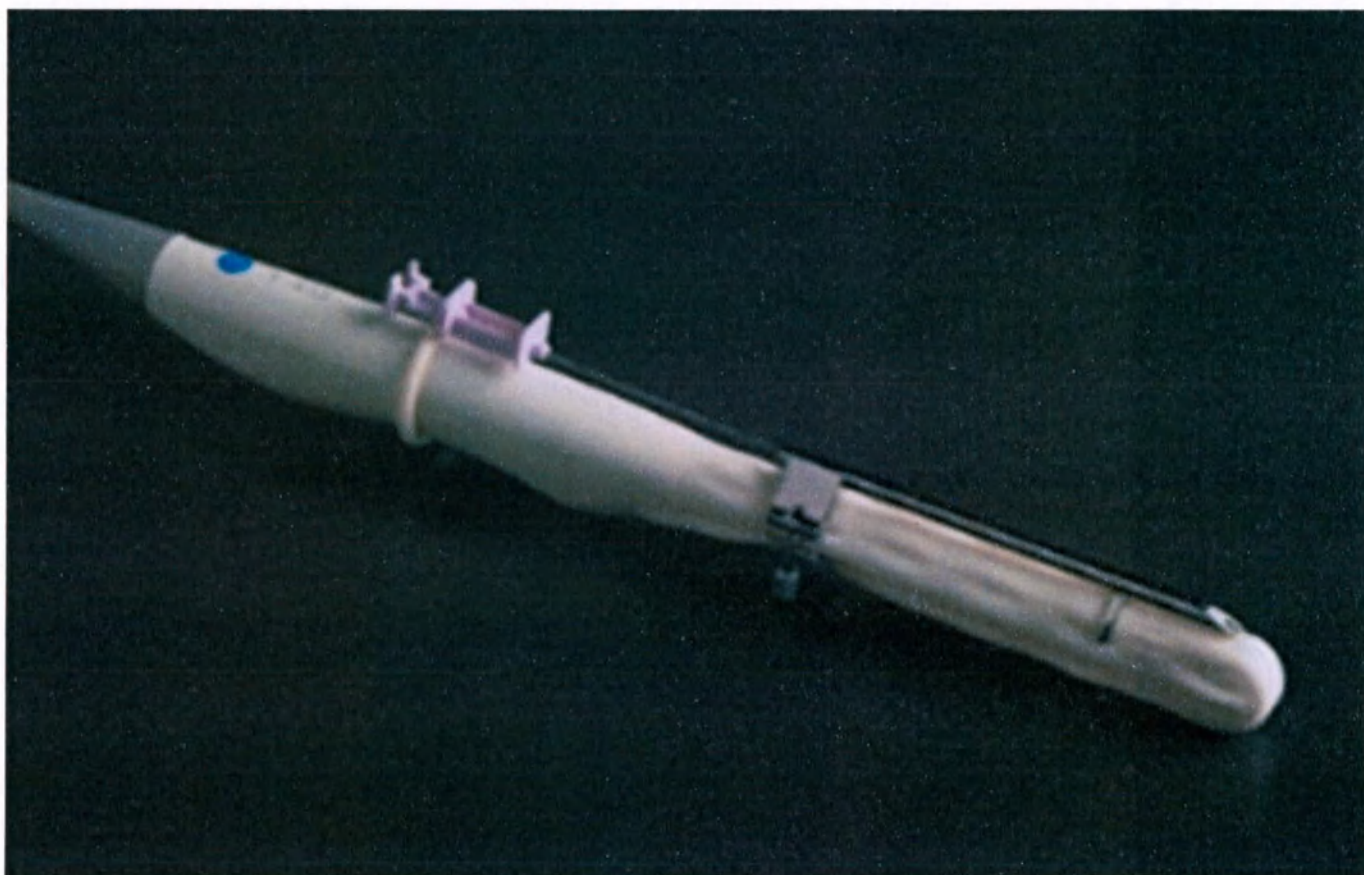


37. Адаптер иглопроводника. многообразный, к датчику EC9-4

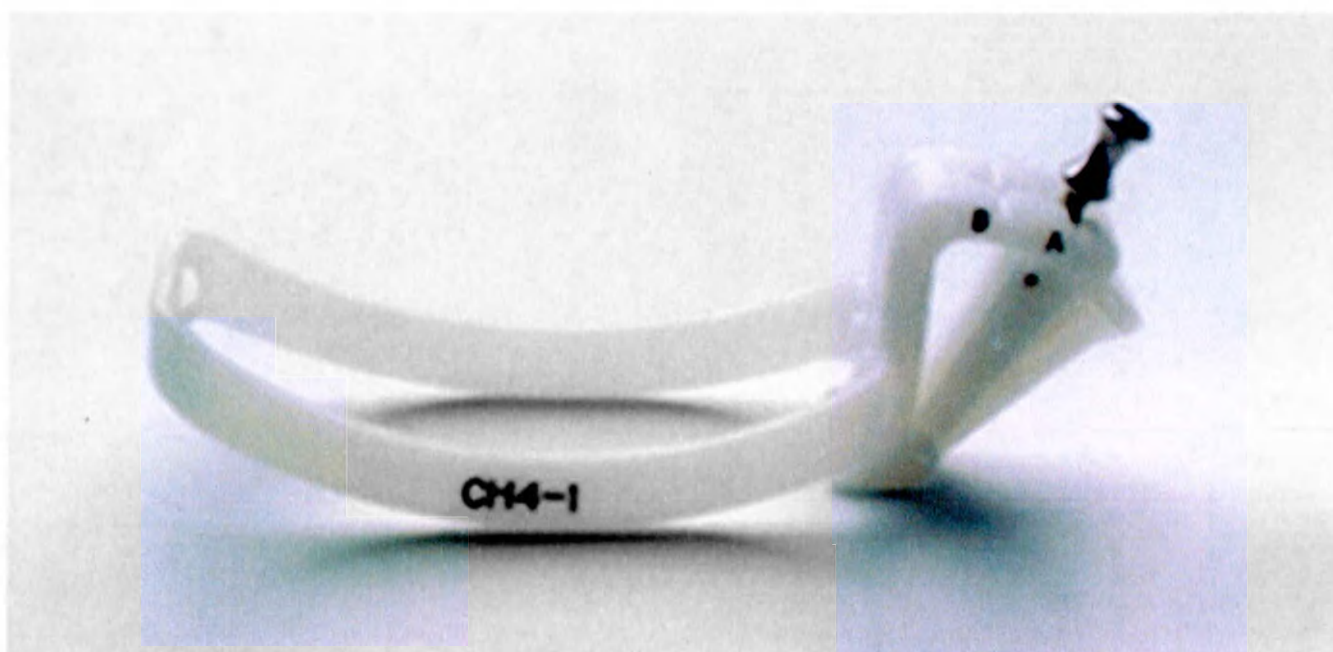

38. Адаптер иглопроводника к датчику CH5-2

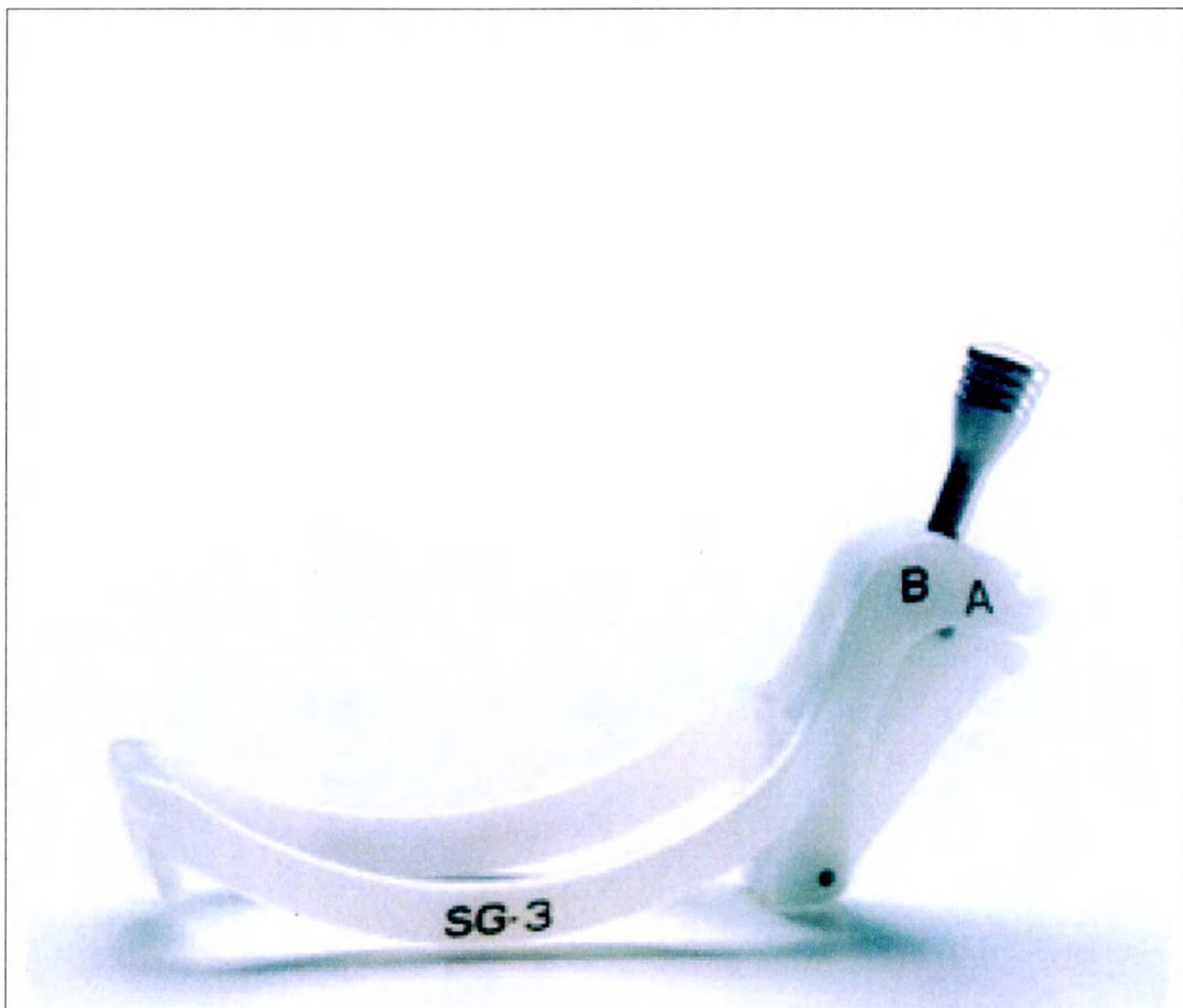

39. Адаптер иглопроводника к датчику VF10-5

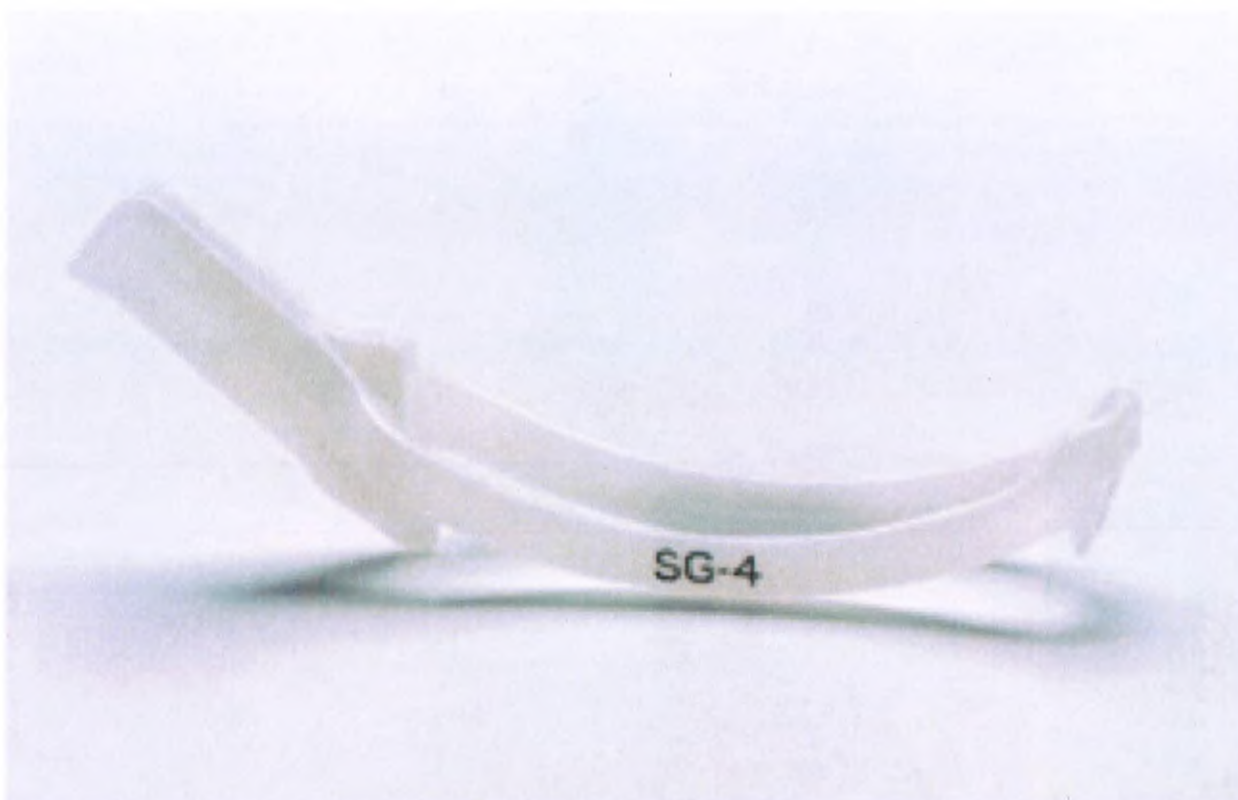

40. Адаптер иглопроводника к датчику VF13-5




POWERLOGICS
 韩国力能

FROSK
 (41NR19/66-2)



CAUTION: Risk of fire, explosion, or burns.
 Do not short circuit, crush or expose Battery to high Temperature,
 incinerate or disassemble the battery.
 Please charge battery before initial use.
 Dispose of all used batteries according to local laws.
 Manufactured by Powerlogics Co., Ltd


ATTENTION: Risque d'incendie, d'explosion ou de brûlures.
 Ne pas court-circuiter, écraser ou exposer la batterie à haute
 température, incinérer ou démonter.
 Charge la batterie avant la première utilisation.
 Jetez toutes les batteries utilisées conformément aux lois locales.
 Fabriqué par Powerlogics Co., Ltd

IS 16046(Part2)/
IEC 62133-2



Li-ion

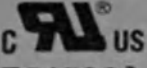
US
E515230



R-41178187
www.bis.gov.in





Made in Korea

P500, BATTERY, PWL



(01) 04056869263533
 (20) 03
 (21) 11681
 (240) 11574664
 (422) 410

DC = 14.8V
 6.4Ah 94.72Wh
 (MIN 6.2Ah 91.76Wh)
 Rechargeable
 Li-ion Battery




PWL-20220425





43. Сканер штрих-кода



44. Защитная наклейка для панели управления

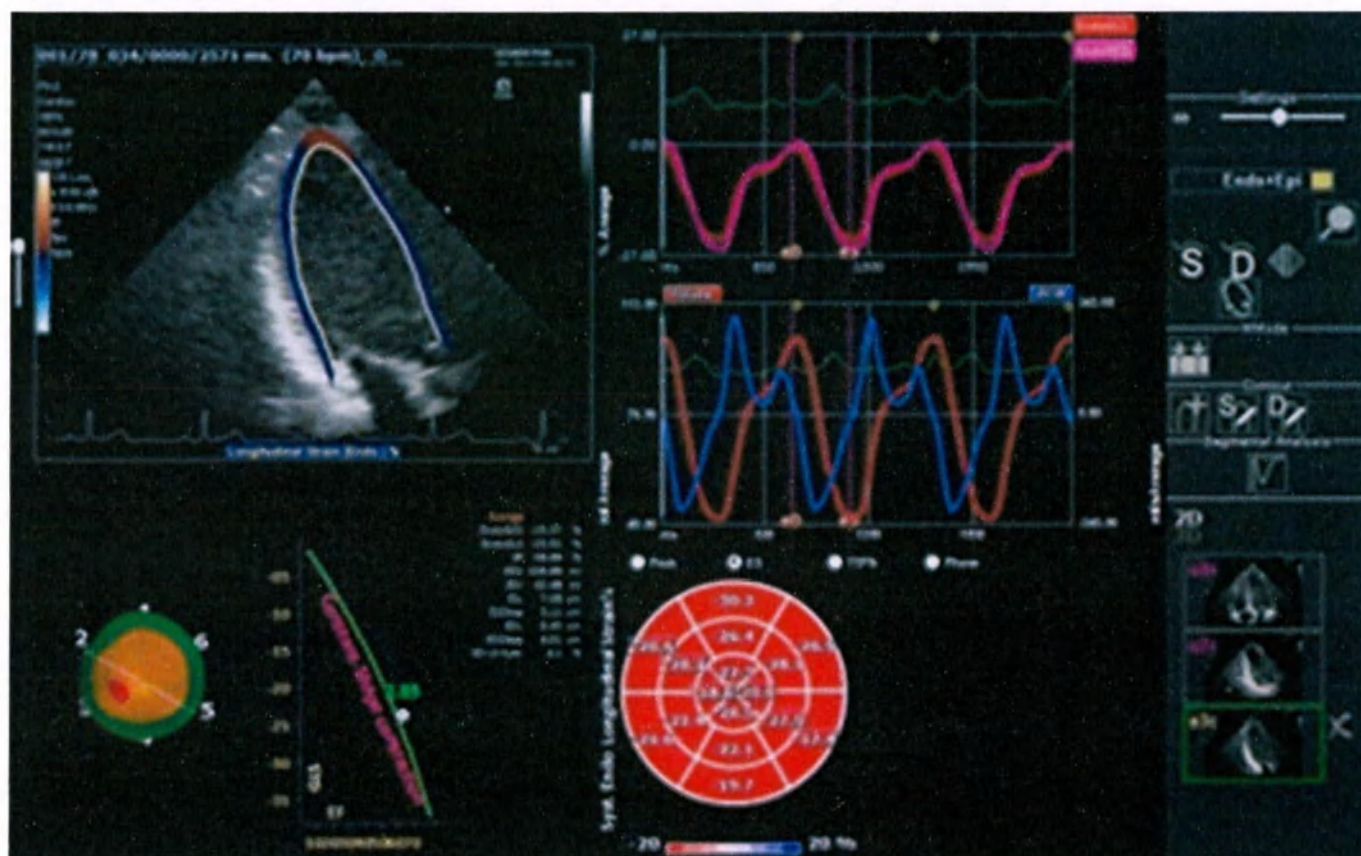

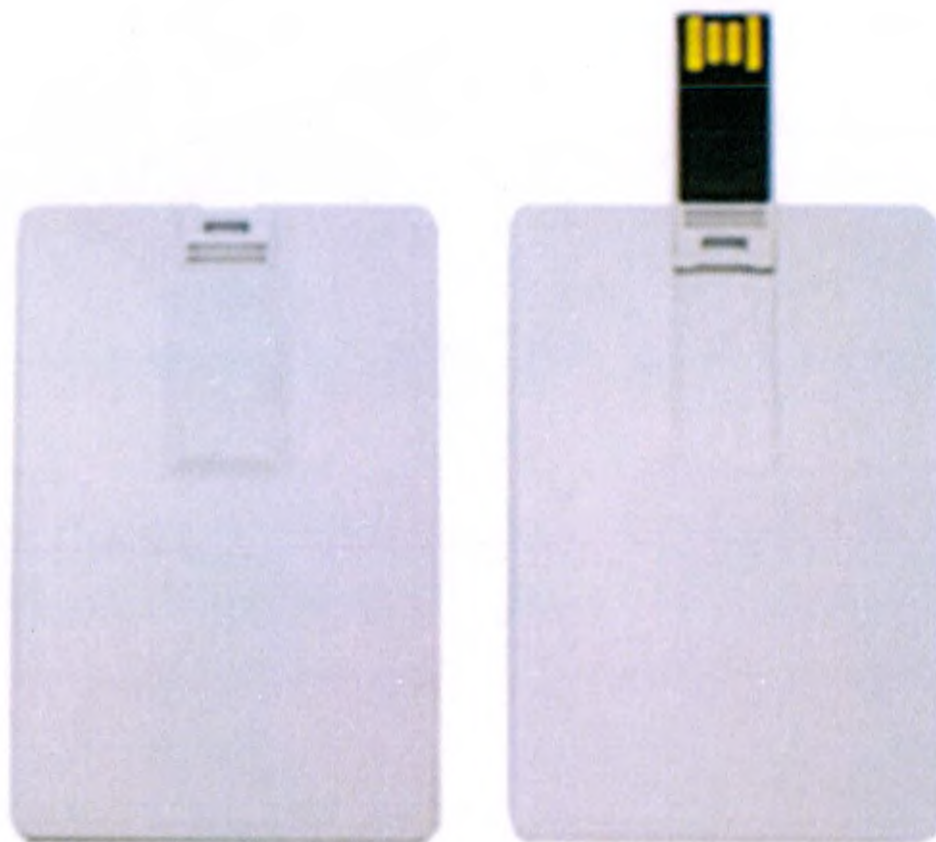

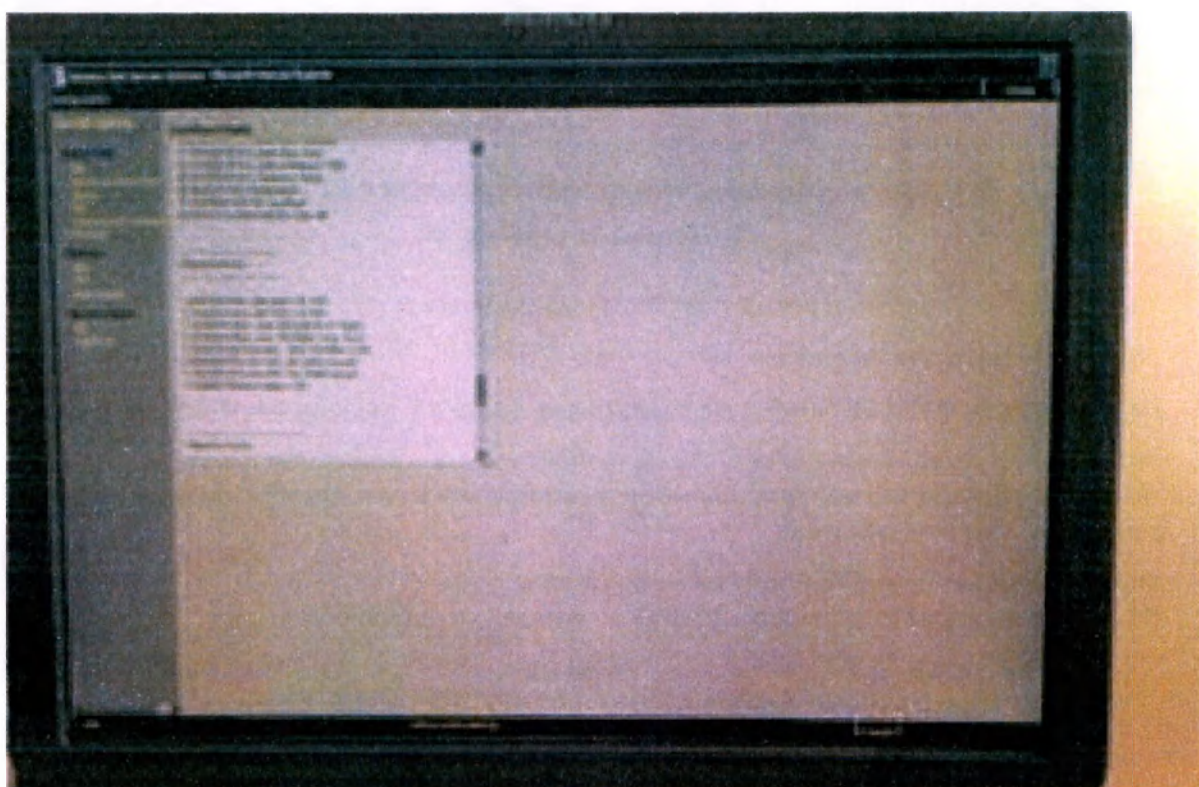

**Система ультразвуковая диагностическая ACUSON P500
с принадлежностями**

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXX от dd.мм.гггг

Страна производства: Корея

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует медицинское изделие; массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.96

100 – 240 В

50/60 Гц

1,8 А

**Система ультразвуковая диагностическая ACUSON P500
с принадлежностями**

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXX от dd.мм.гггг

Страна производства: Малайзия

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует медицинское изделие; массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.96

100 – 240 В

50/60 Гц

1,8 А



Всего прошито и пронумеровано
38 листа (ов).

ООО «Сиенс Здоровоохранение»

