

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БИНОВИ»

А.А. Чуканова

«06» февраля 2024 г.



МАКЕТЫ УПАКОВКИ

медицинского изделия

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые
нестерильные BENOY нитриловые по ТУ 22.19.71-007-19812462-
2023, в вариантах исполнения

г. Санкт-Петербург

Содержание

Тип макета №1 – индивидуальная упаковка для каждого размера	3
Дизайн №1	3
Дизайн №2	7
Дизайн №3	13
Тип макета №2 – универсальная упаковка для всех размеров.....	19
Дизайн №1	19
Дизайн №2	23
Дизайн №3	29

Тип макета №1 – индивидуальная упаковка для каждого размера.

Дизайн №1.

Вариант исполнения №1. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVOY нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с внутренним полимерным покрытием (манжета с валиком), цвет: голубой.



Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVOY нитриловые по ТУ 22.15.71-007-15610462-2020, размер: XX. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVOY нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с внутренним полимерным покрытием (манжета с валиком), цвет: голубой, размер: XX.

RUS НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки предназначены для защиты от биологических жидкостей, химических веществ, а также от загрязнений. Перчатки предназначены для использования в медицинских учреждениях, лабораториях, ветеринарных клиниках, а также в быту.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки должны транспортироваться и храниться в оригинальной упаковке, защищенной от влаги, пыли и механических повреждений. Перчатки должны храниться в сухом, проветриваемом помещении при температуре от +5°C до +25°C. Перчатки должны быть утилизированы после использования в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической службы.

ВНИМАНИЕ! ГЕЛ-НАКЛЕТКА НЕ ЗАМЕДЛЯЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТ ПОГЛОЩЕНИЯ ПАРАМИ И ВОЗДУШНЫМИ ВЫСЫЛКАМИ ВОЗДЕЙСТВИЕМ УМИРЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед использованием перчатки необходимо тщательно вымыть руки с мылом. Перчатки должны использоваться только для однократного использования. После использования перчатки необходимо выбросить их в специальный контейнер для отходов. Перчатки не должны использоваться повторно.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЗАЦИИ ГИГИЕНЫ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки должны использоваться только для однократного использования. После использования перчатки необходимо выбросить их в специальный контейнер для отходов. Перчатки не должны использоваться повторно.

СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ. Перчатки должны использоваться только для однократного использования. После использования перчатки необходимо выбросить их в специальный контейнер для отходов. Перчатки не должны использоваться повторно.

ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Перчатки должны использоваться только для однократного использования. После использования перчатки необходимо выбросить их в специальный контейнер для отходов. Перчатки не должны использоваться повторно.

Медика (содержит в комплектации) Бокс для перчаток nitrile gloves BENOVOY в соответствии с ТУ 22.15.71-007-15610462-2020, design: Medical diagnostic examination of disposable non-sterile nitrile gloves BENOVOY finger textured powder-free with internal polymer coating (beaded cuff), open palm, size XX.

ENG BENOVOY, Company, Limited, Russia, 194294, St. Petersburg, 1, 1st Maying Street, 1st floor, office 101, 1234567 1000, medical gloves company, www.benovo.ru, MANUFACTURING SITE: China.

XX-XXXX
LOT: XXXX
21 PAP
XX-XXXX
Articul: XXXXXXXX
www.benovo.ru

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVOY нитриловые по ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVOY нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с внутренним полимерным покрытием (манжета с валиком), цвет: голубой, размер: XX.

RUS

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные перчатки, пришедшие в негодность, или перчатки с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

МАТЕРИАЛ: нитрил.

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки. Извлечь перчатку из коробки. Рекомендуется касаться ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью (верхний край манжеты). Натянуть первую перчатку. Извлечь вторую перчатку голой рукой, касаясь ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью. Во избежание касания кожи предплечья рукой в перчатке, повернуть наружную поверхность перчатки, которую предстоит надеть, сложенными пальцами руки в перчатке, таким образом, чтобы сделать возможным натягивание перчатки на вторую руку. Надев перчатки, следует прикасаться исключительно к предметам, предусмотренным показаниями к применению и условиями использования перчаток. Во избежание контаминации перед тем, как приступить к новой процедуре, следует сменить перчатки. Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхности перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды. Чтобы снять перчатку, следует подцепить ее на уровне запястья, не касаясь кожи предплечья, и стянуть с руки, выворачивая ее наизнанку. Удерживая снятую перчатку рукой в перчатке, следует поместить пальцы голой руки между перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатав ее по руке, и вложить в первую перчатку. Выбросить перчатки и тщательно вымыть руки. После завершения работы и снятия перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук. Одноразовые перчатки после использования подлежат обеззараживанию/обезвреживанию как медицинские отходы соответствующего класса. Для профилактики сухости и нежелательных явлений на коже рук медицинским работникам рекомендуется всегда использовать профессиональный питательный крем для рук.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЯ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Будучи надежными, медицинские перчатки применяются с учетом температуры тела человека в диапазоне от 36°C до 40°C. Перчатки предназначены только для наружного применения (изделие не инвазивное).

Общество с ограниченной ответственностью «БИНОВИ», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, дом 1, литера Ж, помещение 205, тел. + 7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: Китай.

РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.
Соответствует ГОСТ Р XXXXX-XXXX, ГОСТ XXXXX-XXXX
ТУ 22.19.71-007-19812462-2023

Изделие не подлежит обязательной сертификации.


СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Установленный срок годности - 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик перчаток с учетом приемлемого уровня качества (AQL) ≤ 1.5 в течение всего срока годности при условии целостности упаковки, соблюдения условий хранения, транспортировки, эксплуатации в соответствии с инструкцией.

Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVOY in accordance with TУ 22.19.71-007-19812462-2023, design: Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVOY finger-textured powder-free with internal polymer coating (beaded cuff), color: blue, size: XX.

ENG

"BENOVOY" Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy pereulok, litera J, office 205, +7 (812) 309-16-32; www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru
MANUFACTURING SITE: China.

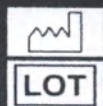

XX-XXXX

XXXX



Артикул: XXXXXXXXX



www.benovy.ru

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVOY нитриловые по ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVOY нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с однократной хлоринацией, повышенной плотности (High Density) (манжета с валиком), цвет: сиреневый, размер: XX.

RUS

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные перчатки, пришедшие в негодность, или перчатки с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

МАТЕРИАЛ: нитрил.

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки. Извлечь перчатку из коробки. Рекомендуется касаться ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью (верхний край манжеты). Натянуть первую перчатку. Извлечь вторую перчатку голой рукой, касаясь ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью. Во избежание касания кожи предплечья рукой в перчатке, повернуть наружную поверхность перчатки, которую предстоит надеть, сложенными пальцами руки в перчатке, таким образом, чтобы сделать возможным натягивание перчатки на вторую руку. Надев перчатки, следует прикасаться исключительно к предметам, предусмотренным показаниями к применению и условиями использования перчаток. Во избежание контаминации перед тем, как приступить к новой процедуре, следует сменить перчатки. Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды. Чтобы снять перчатку, следует подцепить ее на уровне запястья, не касаясь кожи предплечья, и стянуть с руки, выворачивая ее наизнанку. Удерживая снятую перчатку рукой в перчатке, следует поместить пальцы голой руки между перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатав ее по руке, и вложить в первую перчатку. Выбросить перчатки и тщательно вымыть руки. После завершения работы и снятия перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук. Одноразовые перчатки после использования подлежат обеззараживанию/обезвреживанию как медицинские отходы соответствующего класса. Для профилактики сухости и нежелательных явлений на коже рук медицинским работникам рекомендуется всегда использовать профессиональный питательный крем для рук.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЯ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Будучи надетыми, медицинские перчатки применяются с учетом температуры тела человека в диапазоне от 36°C до 40°C. Перчатки предназначены только для наружного применения (изделие не инвазивное).

Общество с ограниченной ответственностью «БИНОВИ», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, дом 1, литера Ж, помещение 205, тел. + 7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: Китай.

ПУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Соответствует ГОСТ Р XXXXX-XXXX, ГОСТ XXXXX-XXXX

ТУ 22.19.71-007-19812462-2023

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Установленный срок годности - 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик перчаток с учетом приемлемого уровня качества (AQL) ≤ 1.5 в течение всего срока годности при условии целостности упаковки, соблюдения условий хранения, транспортировки, эксплуатации в соответствии с инструкцией.

Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVOY in accordance with ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, design: Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVOY finger-textured powder-free with single chlorination, High Density (beaded cuff), color: violet, size: XX.

ENG

"BENOVOY" Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy pereulok, litera J, office 205, +7 (812) 309-16-32; www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru
MANUFACTURING SITE: China.



XX-XXXX

XXXX




Артикул: XXXXXXXXX



www.benovy.ru

Дизайн №2.

Вариант исполнения №1. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные **BENOVY** нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с однократной хлоринацией (удлиненная манжета с валиком), цвет: белый.

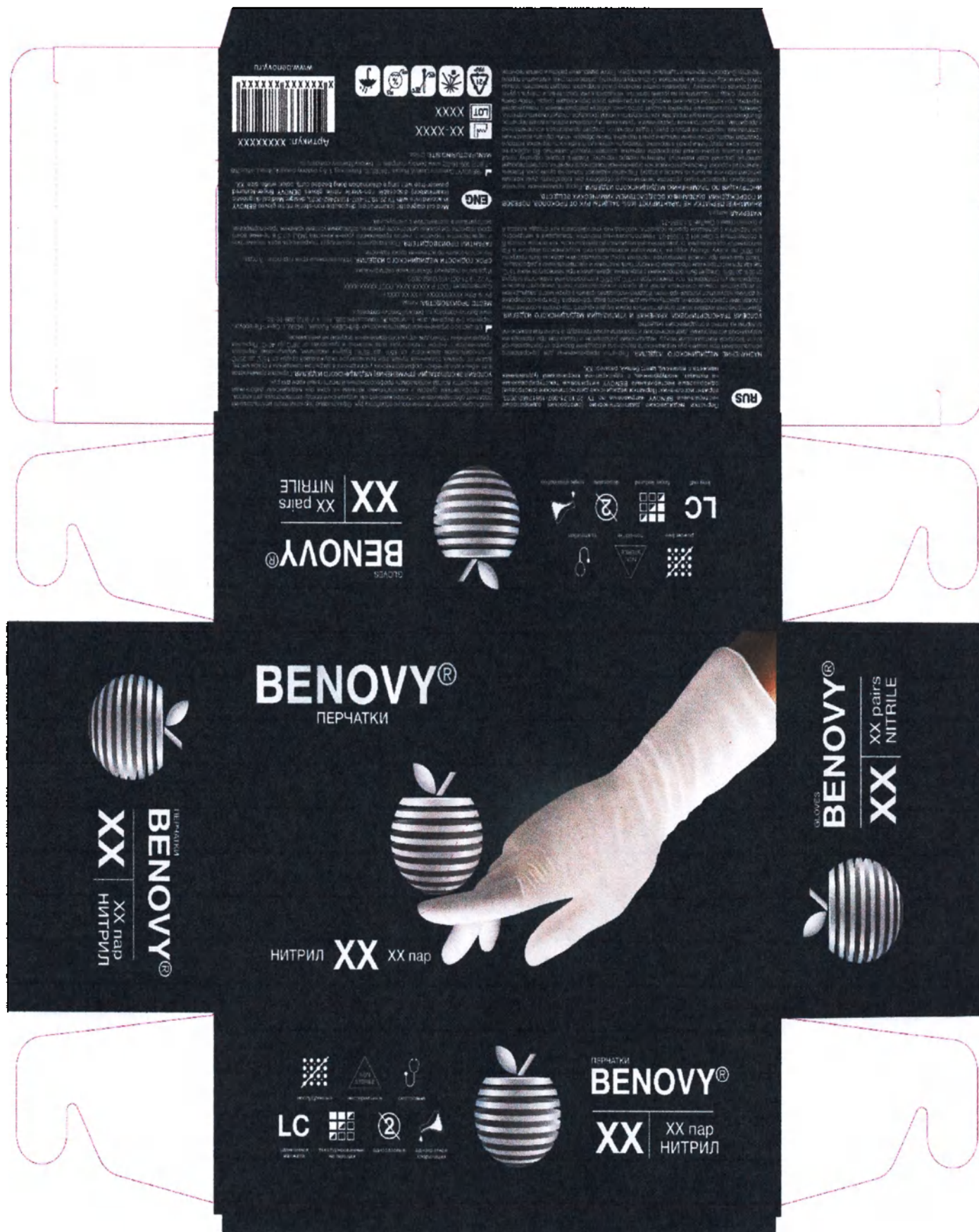

RUS

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVI нитриловые по ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVI нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с однократной хлоринацией (удлиненная манжета с валиком), цвет: белый, размер: XX.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные перчатки, пришедшие в негодность, или перчатки с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

МАТЕРИАЛ: нитрил.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки. Извлечь перчатку из коробки. Рекомендуется касаться ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью (верхний край манжеты). Натянуть первую перчатку. Извлечь вторую перчатку голый рукой, касаясь ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью. Во избежание касания кожи предплечья рукой в перчатке, повернуть наружную поверхность перчатки, которую предстоит надеть, сложенными пальцами руки в перчатке, таким образом, чтобы сделать возможным натягивание перчатки на вторую руку. Надев перчатки, следует прикасаться исключительно к предметам, предусмотренным показаниями к применению и условиями использования перчаток. Во избежание контаминации перед тем, как приступить к новой процедуре, следует сменить перчатки. Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды. Чтобы снять перчатку, следует подцепить ее на уровне запястья, не касаясь кожи предплечья, и стянуть с руки, выворачивая ее наизнанку. Удерживая снятую перчатку рукой в перчатке, следует поместить пальцы голый руки между перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатав ее по руке, и вложить в первую перчатку. Выбросить перчатки и тщательно вымыть руки. После завершения работы и снятия перчаток

необходимо провести гигиеническую обработку рук. Одноразовые перчатки после использования подлежат обеззараживанию/обезвреживанию как медицинские отходы соответствующего класса. Для профилактики сухости и нежелательных явлений на коже рук медицинским работникам рекомендуется всегда использовать профессиональный питательный крем для рук.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЯ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Будучи надетыми, медицинские перчатки применяются с учетом температуры тела человека в диапазоне от 36°C до 40°C. Перчатки предназначены только для наружного применения (изделие не инвазивное).

Общество с ограниченной ответственностью «БИНОВИ», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, дом 1, литера Ж, помещение 205, тел. + 7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: Китай.

РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Соответствует ГОСТ Р XXXXX-XXXX, ГОСТ XXXXX-XXXX

ТУ 22.19.71-007-19812462-2023

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Установленный срок годности - 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик перчаток с учетом приемлемого уровня качества (AQL) ≤ 1.5 в течение всего срока годности при условии целостности упаковки, соблюдения условий хранения, транспортировки, эксплуатации в соответствии с инструкцией.

ENG

Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVI in accordance with ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, design: Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVI finger-textured powder-free with single chlorination (long beaded cuff), color: white, size: XX.

"BENOVI" Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy pereulok, litera J, office 205, +7 (812) 309-16-32; www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

MANUFACTURING SITE: China.



XX-XXXX



XXXX



Артикул: XXXXXXXX



www.benovy.ru

Вариант исполнения №2. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVO нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с внутренним полимерным покрытием, повышенной плотности (High Density) (манжета с валиком), цвет: зеленый.

BENOVO®
XX pairs
NITRILE



BENOVO®
XX pairs
NITRILE

BENOVO®
XX pairs
NITRILE

BENOVO®
XX pairs
NITRILE



BENOVO®
XX pairs
NITRILE

BENOVO®
XX pairs
NITRILE


BENOVO®
XX pairs
NITRILE



BENOVO®
XX pairs
NITRILE

BENOVO®
XX pairs
NITRILE

BENOVO®
XX pairs
NITRILE

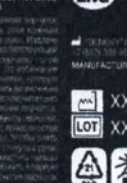

BENOVO®
XX pairs
NITRILE

BENOVO®
XX pairs
NITRILE

BENOVO®
XX pairs
NITRILE



BENOVO®
XX pairs
NITRILE

BENOVO®
XX pairs
NITRILE

RUS

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVI нитриловые по ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVI нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с внутренним полимерным покрытием, повышенной плотности (High Density) (манжета с валиком), цвет: зеленый, размер: XX.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные перчатки, пришедшие в негодность, или перчатки с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

МАТЕРИАЛ: нитрил.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки. Извлечь перчатку из коробки. Рекомендуется касаться ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью (верхний край манжеты). Натянуть первую перчатку. Извлечь вторую перчатку голой рукой, касаясь ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью. Во избежание касания кожи предплечья рукой в перчатке, повернуть наружную поверхность перчатки, которую предстоит надеть, сложенными пальцами руки в перчатке, таким образом, чтобы сделать возможным натягивание перчатки на вторую руку. Надев перчатки, следует прикасаться исключительно к предметам, предусмотренным показаниями к применению и условиями использования перчаток. Во избежание контаминации перед тем, как приступить к новой процедуре, следует сменить перчатки. Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды. Чтобы снять перчатку, следует подцепить ее на уровне запястья, не касаясь кожи предплечья, и стянуть с руки, выворачивая ее наизнанку. Удерживая снятую перчатку рукой в перчатке, следует поместить пальцы голой руки между перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатав ее по руке, и вложить в первую перчатку. Выбросить перчатки и тщательно вымыть руки. После завершения работы и снятия перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук. Одноразовые перчатки после использования

подлежат обеззараживанию/обезвреживанию как медицинские отходы соответствующего класса. Для профилактики сухости и нежелательных явлений на коже рук медицинским работникам рекомендуется всегда использовать профессиональный питательный крем для рук.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЯ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Будучи надетыми, медицинские перчатки применяются с учетом температуры тела человека в диапазоне от 36°C до 40°C. Перчатки предназначены только для наружного применения (изделие не инвазивное).

Общество с ограниченной ответственностью «БИНОВИ», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, дом 1, литера Ж, помещение 205, тел. + 7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: Китай.

РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Соответствует ГОСТ Р XXXXX-XXXX, ГОСТ XXXXX-XXXX

ТУ 22.19.71-007-19812462-2023

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Установленный срок годности - 3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик перчаток с учетом приемлемого уровня качества (AQL) ≤ 1.5 в течение всего срока годности при условии целостности упаковки, соблюдения условий хранения, транспортировки, эксплуатации в соответствии с инструкцией.

ENG

Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVI in accordance with TУ 22.19.71-007-19812462-2023, design: Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVI finger-textured powder-free with internal polymer coating, High Density (beaded cuff), color: green, size: XX.

"BENOVI" Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy pereulok, litera J, office 205, +7 (812) 309-16-32; www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru.

MANUFACTURING SITE: China.



XX-XXXX



XXXX



Артикул: XXXXXXXX



www.benovy.ru

Вариант исполнения №3. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVO нитриловые с выраженной ромбовидной текстурой по всей поверхности для улучшенного сцепления, неопудренные, повышенной плотности (High Density) (удлиненная манжета с валиком), цвет: оранжевый.

Артикул: XXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX

Материал: нитрил-бутадиеновый каучук (NBR).
Цвет: оранжевый.
Плотность: высокая (High Density).
Текстура: ромбовидная.
Длина манжеты: удлиненная с валиком.
Стерильность: нестерильные.
Использование: медицинские диагностические (смотровые).
Срок годности: 3 года.

Перчатки BENOVO нитриловые с выраженной ромбовидной текстурой по всей поверхности для улучшенного сцепления, неопудренные, повышенной плотности (High Density) (удлиненная манжета с валиком), цвет: оранжевый.

BENOVO®
CLOVES
XX pairs
NITRILE

LC
Low Cut
High Density
Nitrile
XX pairs

BENOVO®
XX pairs
NITRILE

HD
High Density

BENOVO®
ПЕРЧАТКИ

НИТРИЛ **XX** XX пар

BENOVO®
XX pairs
NITRILE

LC
Low Cut
High Density
Nitrile
XX pairs

BENOVO®
XX pairs
NITRILE

RUS

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVOY нитриловые по ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVOY нитриловые с выраженной ромбовидной текстурой по всей поверхности для улучшенного сцепления, неопудренные, повышенной плотности (High Density) (удлиненная манжета с валиком), цвет: оранжевый, размер: XX.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные перчатки, пришедшие в негодность, или перчатки с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

МАТЕРИАЛ: нитрил.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки. Извлечь перчатку из коробки. Рекомендуется касаться ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью (верхний край манжеты). Натянуть первую перчатку. Извлечь вторую перчатку голый рукой, касаясь ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью. Во избежание касания кожи предплечья рукой в перчатке, повернуть наружную поверхность перчатки, которую предстоит надеть, сложенными пальцами руки в перчатке, таким образом, чтобы сделать возможным натягивание перчатки на вторую руку. Надев перчатки, следует прикасаться исключительно к предметам, предусмотренным показаниями к применению и условиям использования перчаток. Во избежание контаминации перед тем, как приступить к новой процедуре, следует сменить перчатки. Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды. Чтобы снять перчатку, следует подцепить ее на уровне запястья, не касаясь кожи предплечья, и стянуть с руки, выворачивая ее наизнанку. Удерживая снятую перчатку рукой в перчатке, следует поместить пальцы голый руки между перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатав ее по руке, и вложить в первую перчатку. Выбросить перчатки и тщательно вымыть руки. После завершения работы и снятия перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук. Одноразовые перчатки после использования

подлежат обеззараживанию/обезвреживанию как медицинские отходы соответствующего класса. Для профилактики сухости и нежелательных явлений на коже рук медицинским работникам рекомендуется всегда использовать профессиональный питательный крем для рук.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЯ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Будучи надетыми, медицинские перчатки применяются с учетом температуры тела человека в диапазоне от 36°C до 40°C. Перчатки предназначены только для наружного применения (изделие не инвазивное).

Общество с ограниченной ответственностью «БИНОВИ». Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, дом 1, литера Ж, помещение 205, тел. + 7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: Китай.

РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Соответствует ГОСТ Р XXXXX-XXXX, ГОСТ XXXXX-XXXX
ТУ 22.19.71-007-19812462-2023

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Установленный срок годности - 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик перчаток с учетом приемлемого уровня качества (AQL) ≤ 1.5 в течение всего срока годности при условии целостности упаковки, соблюдения условий хранения, транспортировки, эксплуатации в соответствии с инструкцией.

ENG

Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVOY in accordance with ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, design: Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVOY with diamond-shaped texture for better adhesion, powder-free, High Density (long beaded cuff), color: orange, size: XX.

“BENOVOY” Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy pereulok, litera J, office 205, +7 (812) 309-16-32; www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru.


MANUFACTURING SITE: China.



XX-XXXX



XXXX

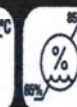

Артикул: XXXXXXXX



www.benovy.ru

Дизайн №3.

Вариант исполнения №4. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные **BENOVY DENTAL FORMULA** нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с однократной хлоринацией (манжета с валиком), цвет: фуксия.



RUS

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVOY нитриловые по ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVOY DENTAL FORMULA нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с однократной хлоринацией (манжета с валиком), цвет: фуксия, размер: XX.

DENTAL FORMULA — линейка медицинских перчаток, разработанная специально для стоматологов.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные перчатки, пришедшие в негодность, или перчатки с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

МАТЕРИАЛ: нитрил.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки. Извлечь перчатку из коробки. Рекомендуется касаться ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью (верхний край манжеты). Натянуть первую перчатку. Извлечь вторую перчатку голой рукой, касаясь ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью. Во избежание касания кожи предплечья рукой в перчатке, повернуть наружную поверхность перчатки, которую предстоит надеть, сложенными пальцами руки в перчатке, таким образом, чтобы сделать возможным натягивание перчатки на вторую руку. Надев перчатки, следует прикасаться исключительно к предметам, предусмотренным показаниями к применению и условиями использования перчаток. Во избежание контаминации перед тем, как приступить к новой процедуре, следует сменить перчатки. Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчаток, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды. Чтобы снять перчатку, следует подцепить ее на уровне запястья, не касаясь кожи предплечья, и стянуть с руки, выворачивая ее наизнанку. Удерживая снятую перчатку рукой в перчатке, следует поместить пальцы голой руки между перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатав ее по руке, и вложить в первую перчатку. Выбросить перчатки и тщательно вымыть руки. После завершения работы и снятия перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук. Одноразовые перчатки после использования

подлежат обеззараживанию/обезвреживанию как медицинские отходы соответствующего класса. Для профилактики сухости и нежелательных явлений на коже рук медицинским работникам рекомендуется всегда использовать профессиональный питательный крем для рук.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЯ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Будучи надетыми, медицинские перчатки применяются с учетом температуры тела человека в диапазоне от 36°C до 40°C. Перчатки предназначены только для наружного применения (изделие не инвазивное).

Общество с ограниченной ответственностью «БИНОВИ», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, дом 1, литера Ж, помещение 205, тел. + 7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: Китай.

РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Соответствует ГОСТ Р XXXXX-XXXX, ГОСТ XXXXX-XXXX

ТУ 22.19.71-007-19812462-2023

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Установленный срок годности - 3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик перчаток с учетом приемлемого уровня качества (AQL) ≤ 1.5 в течение всего срока годности при условии целостности упаковки, соблюдения условий хранения, транспортировки, эксплуатации в соответствии с инструкцией.

ENG

Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVOY in accordance with TУ 22.19.71-007-19812462-2023, design: Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVOY DENTAL FORMULA finger-textured powder-free with single chlorination (beaded cuff), color: fuchsia, size: XX.

DENTAL FORMULA — a line of medical gloves designed specifically for dentists.

"BENOVOY" Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy pereulok, litera J, office 205, +7 (812) 309-16-32; www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru.


MANUFACTURING SITE: China.



XX-XXXX




XXXX

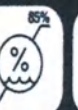

Артикул: XXXXXXXX


www.benovy.ru

Вариант исполнения №5. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные **BENOVY DENTAL FORMULA** нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с двукратной хлоринацией, повышенной плотности (High Density) (удлиненная манжета с валиком), цвет: розовый.

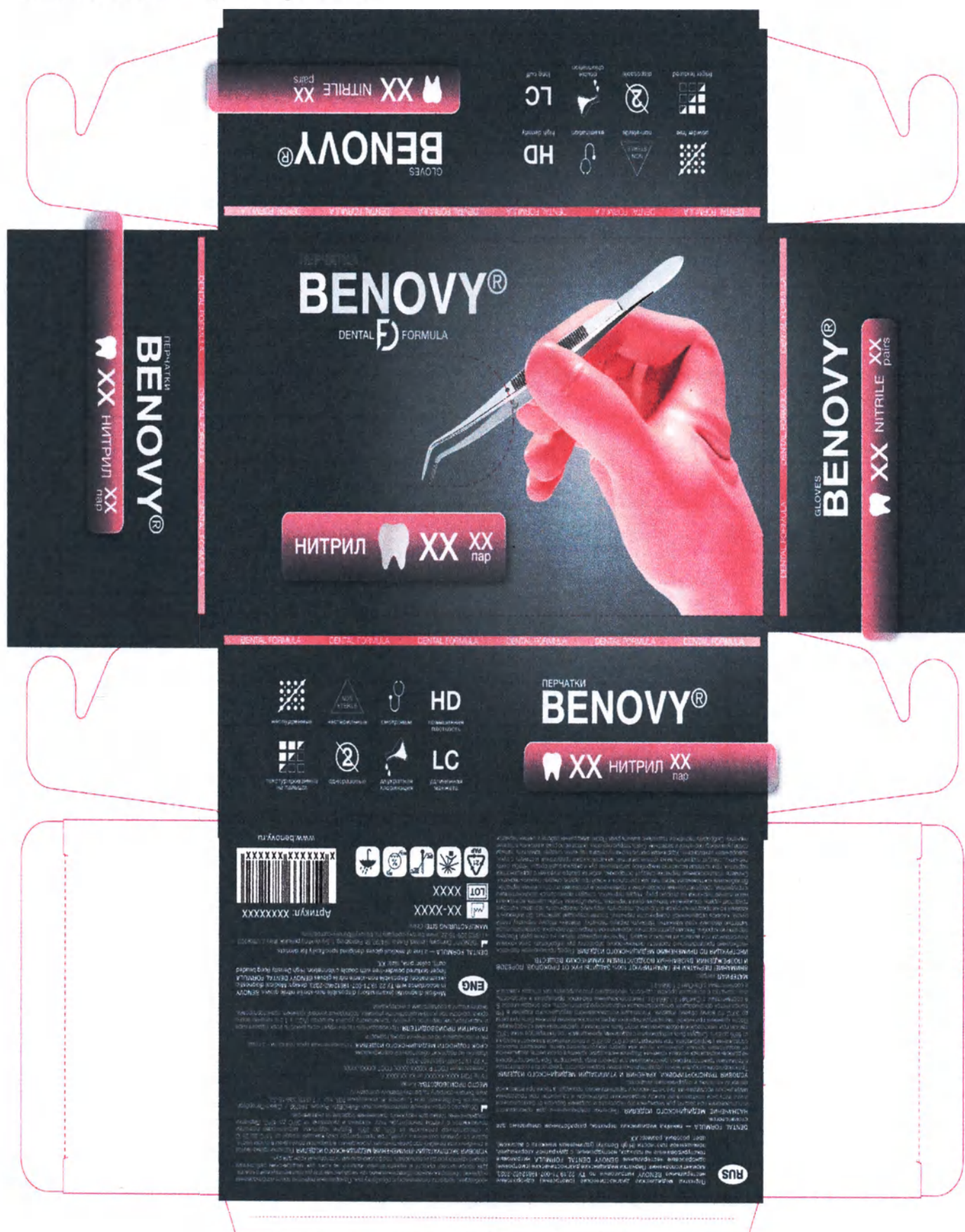

RUS

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVOY нитриловые по ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVOY DENTAL FORMULA нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с двукратной хлоринацией, повышенной плотности (High Density) (удлиненная манжета с валиком), цвет: розовый, размер: XX.

DENTAL FORMULA — линейка медицинских перчаток, разработанная специально для стоматологов.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные перчатки, пришедшие в негодность, или перчатки с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

МАТЕРИАЛ: нитрил.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки. Извлечь перчатку из коробки. Рекомендуется касаться ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью (верхний край манжеты). Натянуть первую перчатку. Извлечь вторую перчатку голой рукой, касаясь ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью. Во избежание касания кожи предплечья рукой в перчатке, повернуть наружную поверхность перчатки, которую предстоит надеть, сложенными пальцами руки в перчатке, таким образом, чтобы сделать возможным натягивание перчатки на вторую руку. Надев перчатки, следует прикасаться исключительно к предметам, предусмотренным показаниями к применению и условиями использования перчаток. Во избежание контаминации перед тем, как приступить к новой процедуре, следует сменить перчатки. Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды. Чтобы снять перчатку, следует подцепить ее на уровне запястья, не касаясь кожи предплечья, и стянуть с руки, выворачивая ее наизнанку. Удерживая снятую перчатку рукой в перчатке, следует поместить пальцы голой руки между перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатав ее по руке, и вложить в первую перчатку. Выбросить перчатки и тщательно вымыть руки. После завершения работы и снятия перчаток

необходимо провести гигиеническую обработку рук. Одноразовые перчатки после использования подлежат обеззараживанию/обезвреживанию как медицинские отходы соответствующего класса. Для профилактики сухости и нежелательных явлений на коже рук медицинским работникам рекомендуется всегда использовать профессиональный питательный крем для рук.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЯ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Будучи надетыми, медицинские перчатки применяются с учетом температуры тела человека в диапазоне от 36°C до 40°C. Перчатки предназначены только для наружного применения (изделие не инвазивное).

Общество с ограниченной ответственностью «БИНОВИ», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, дом 1, литера Ж, помещение 205, тел. + 7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: Китай.

РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Соответствует ГОСТ Р XXXXX-XXXX, ГОСТ XXXXX-XXXX

ТУ 22.19.71-007-19812462-2023

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Установленный срок годности - 3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик перчаток с учетом приемлемого уровня качества (AQL) ≤ 1.5 в течение всего срока годности при условии целостности упаковки, соблюдения условий хранения, транспортировки, эксплуатации в соответствии с инструкцией.

ENG

Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVOY in accordance with TУ 22.19.71-007-19812462-2023, design: Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVOY DENTAL FORMULA finger-textured powder-free with double chlorination, High Density (long beaded cuff), color: pink, size: XX.

DENTAL FORMULA — a line of medical gloves designed specifically for dentists.

"BENOVOY" Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy pereulok, litera J, office 205, +7 (812) 309-16-32; www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru



MANUFACTURING SITE: China.



XX-XXXX



XXXX

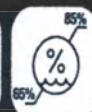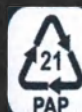

Артикул: XXXXXXXX



www.benovy.ru

Вариант исполнения №6. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные **BENOVY DENTAL FORMULA** нитриловые с выраженной ромбовидной текстурой по всей поверхности для улучшенного сцепления, неопудренные, повышенной плотности (High Density) (манжета с валиком), цвет: черный.



RUS

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOBY нитриловые по ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOBY DENTAL FORMULA нитриловые с выраженной ромбовидной текстурой по всей поверхности для улучшенного сцепления, неопудренные, повышенной плотности (High Density) (манжета с валиком), цвет: черный, размер: XX.

DENTAL FORMULA — линейка медицинских перчаток, разработанная специально для стоматологов.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные перчатки, пришедшие в негодность, или перчатки с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

МАТЕРИАЛ: нитрил.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки. Извлечь перчатку из коробки. Рекомендуется касаться ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью (верхний край манжеты). Натянуть первую перчатку. Извлечь вторую перчатку голый рукой, касаясь ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью. Во избежание касания кожи предплечья рукой в перчатке, повернуть наружную поверхность перчатки, которую предстоит надеть, сложенными пальцами руки в перчатке, таким образом, чтобы сделать возможным натягивание перчатки на вторую руку. Надев перчатки, следует прикасаться исключительно к предметам, предусмотренным показаниями к применению и условиями использования перчаток. Во избежание контаминации перед тем, как приступить к новой процедуре, следует сменить перчатки. Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды. Чтобы снять перчатку, следует подцепить ее на уровне запястья, не касаясь кожи предплечья, и стянуть с руки, выворачивая ее наизнанку. Удерживая снятую перчатку рукой в перчатке, следует поместить пальцы голый руки между перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатав ее по руке, и вложить в первую

перчатку. Выбросить перчатки и тщательно вымыть руки. После завершения работы и снятия перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук. Одноразовые перчатки после использования подлежат обеззараживанию/обезвреживанию как медицинские отходы соответствующего класса. Для профилактики сухости и нежелательных явлений на коже рук медицинским работникам рекомендуется всегда использовать профессиональный питательный крем для рук.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЯ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Будучи надетыми, медицинские перчатки применяются с учетом температуры тела человека в диапазоне от 36°C до 40°C. Перчатки предназначены только для наружного применения (изделие не инвазивное).

Общество с ограниченной ответственностью «БИОБИ», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, дом 1, литера Ж, помещение 205, тел. + 7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: Китай.

ПУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Соответствует ГОСТ Р XXXX-XXXX, ГОСТ XXXX-XXXX

ТУ 22.19.71-007-19812462-2023

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Установленный срок годности - 3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик перчаток с учетом приемлемого уровня качества (AQL) ≤ 1.5 в течение всего срока годности при условии целостности упаковки, соблюдения условий хранения, транспортировки, эксплуатации в соответствии с инструкцией.

ENG

Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOBY in accordance with TУ 22.19.71-007-19812462-2023, design: Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOBY DENTAL FORMULA with diamond-shaped texture for better adhesion, powder-free, High Density (beaded cuff), color: black, size: XX.


DENTAL FORMULA — a line of medical gloves designed specifically for dentists.

“BENOBY” Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy pereulok, litera J, office 205, +7 (812) 309-16-32; www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru.

MANUFACTURING SITE: China.

XX-XXXX

LOT XXXX

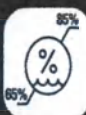

Артикул: XXXXXXXX



www.benovy.ru

Тип макета №2 – универсальная упаковка для всех размеров.

Дизайн №1.

Вариант исполнения №1. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVO нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с внутренним полимерным покрытием (манжета с валиком), цвет: голубой.



Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVOY нитриловые по ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVOY нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с внутренним полимерным покрытием (манжета с валиком), цвет: голубой, размеры: XS, S, M, L, XL.

RUS

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные перчатки, пришедшие в негодность, или перчатки с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

МАТЕРИАЛ: нитрил.

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки. Извлечь перчатку из коробки. Рекомендуется касаться ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью (верхний край манжеты). Натянуть первую перчатку. Извлечь вторую перчатку голый рукой, касаясь ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью. Во избежание касания кожи предплечья рукой в перчатке, повернуть наружную поверхность перчатки, которую предстоит надеть, сложенными пальцами руки в перчатке, таким образом, чтобы сделать возможным натягивание перчатки на вторую руку. Надев перчатки, следует прикасаться исключительно к предметам, предусмотренным показаниями к применению и условиями использования перчаток. Во избежание контаминации перед тем, как приступить к новой процедуре, следует сменить перчатки. Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхности перчаткой, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды. Чтобы снять перчатку, следует подцепить ее на уровне запястья, не касаясь кожи предплечья, и стянуть с руки, выворачивая ее наизнанку. Удерживая снятую перчатку рукой в перчатке, следует поместить пальцы голый руки между перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатав ее по руке, и вложить в первую перчатку. Выбросить перчатки и тщательно вымыть руки. После завершения работы и снятия перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук. Одноразовые перчатки после использования подлежат обеззараживанию/обезвреживанию как медицинские отходы соответствующего класса. Для профилактики сухости и нежелательных явлений на коже рук медицинским работникам рекомендуется всегда использовать профессиональный питательный крем для рук.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЯ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Будучи надетыми, медицинские перчатки применяются с учетом температуры тела человека в диапазоне от 36°C до 40°C. Перчатки предназначены только для наружного применения (изделие не инвазивное).

Общество с ограниченной ответственностью «БИНОВИ», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, дом 1, литера Ж, помещение 205, тел. + 7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: Китай.

РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Соответствует ГОСТ Р XXXXX-XXXX, ГОСТ XXXXX-XXXX

ТУ 22.19.71-007-19812462-2023

Изделие не подлежит обязательной сертификации.


СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Установленный срок годности - 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик перчаток с учетом приемлемого уровня качества (AQL) ≤ 1.5 в течение всего срока годности при условии целостности упаковки, соблюдения условий хранения, транспортировки, эксплуатации в соответствии с инструкцией.



Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVOY in accordance with ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, design: Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVOY finger-textured powder-free with internal polymer coating (beaded cuff), color: blue, sizes: XS, S, M, L, XL.

ENG

“BENOVOY” Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy pereulok, litera J, office 205, +7 (812) 309-16-32; www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru
MANUFACTURING SITE: China.

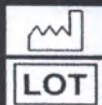

XX-XXXX
XXXX

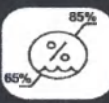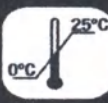

www.benovy.ru

Вариант исполнения №2. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVOY нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, однократной хлоринацией, повышенной плотности (High Density) (манжета с валиком), цвет: сиреневый.



Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOXY нитриловые по ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOXY нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с однократной хлоринацией, повышенной плотности (High Density) (манжета с валиком), цвет: сиреневый, размер: XX.

RUS

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Используется для защиты рук медицинского персонала при контакте с биологическими жидкостями, а также для защиты пациента от инфицирования. Не рекомендуется использовать для защиты от химических веществ, острых предметов и высоких температур.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. При транспортировке и хранении изделия необходимо соблюдать следующие условия: хранить в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от влаги, света и пыли месте; избегать воздействия высоких температур и агрессивных химических веществ; использовать изделие в соответствии с инструкцией. После использования изделие необходимо утилизировать в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического надзора. Не рекомендуется использовать изделие для защиты от острых предметов, химических веществ и высоких температур.

МАТЕРИАЛ

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИИ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед использованием изделия необходимо тщательно вымыть руки с мылом. Надеть изделие, не касаясь внутренней поверхности. Избегать контакта с острыми предметами, химическими веществами и высокими температурами. После использования изделие необходимо снять, не касаясь внутренней поверхности, и утилизировать в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического надзора. Не рекомендуется использовать изделие для защиты от острых предметов, химических веществ и высоких температур.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЯ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. При эксплуатации изделия необходимо соблюдать следующие условия: использовать изделие в соответствии с инструкцией; избегать контакта с острыми предметами, химическими веществами и высокими температурами; использовать изделие для защиты от биологических жидкостей.

Место производства: Россия, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10.

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА

г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10
г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10
г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Срок годности изделия составляет 24 месяца с даты изготовления.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует качество изделия в соответствии с требованиями ТУ 22.19.71-007-19812462-2023.

Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOXY in accordance with TY 22.19.71-007-19812462-2023, design: Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOXY finger-textured powder-free with single chlorination, High Density (beaded cuff), color: violet, size: XX.

ENG

MANUFACTURING SITE: Russia



XX-XXXX



XXXX




Артикул: XXXXXXXX



www.benovy.ru

Дизайн №2.

Вариант исполнения №1. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVO нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с однократной хлоринацией (удлиненная манжета с валиком), цвет: белый.

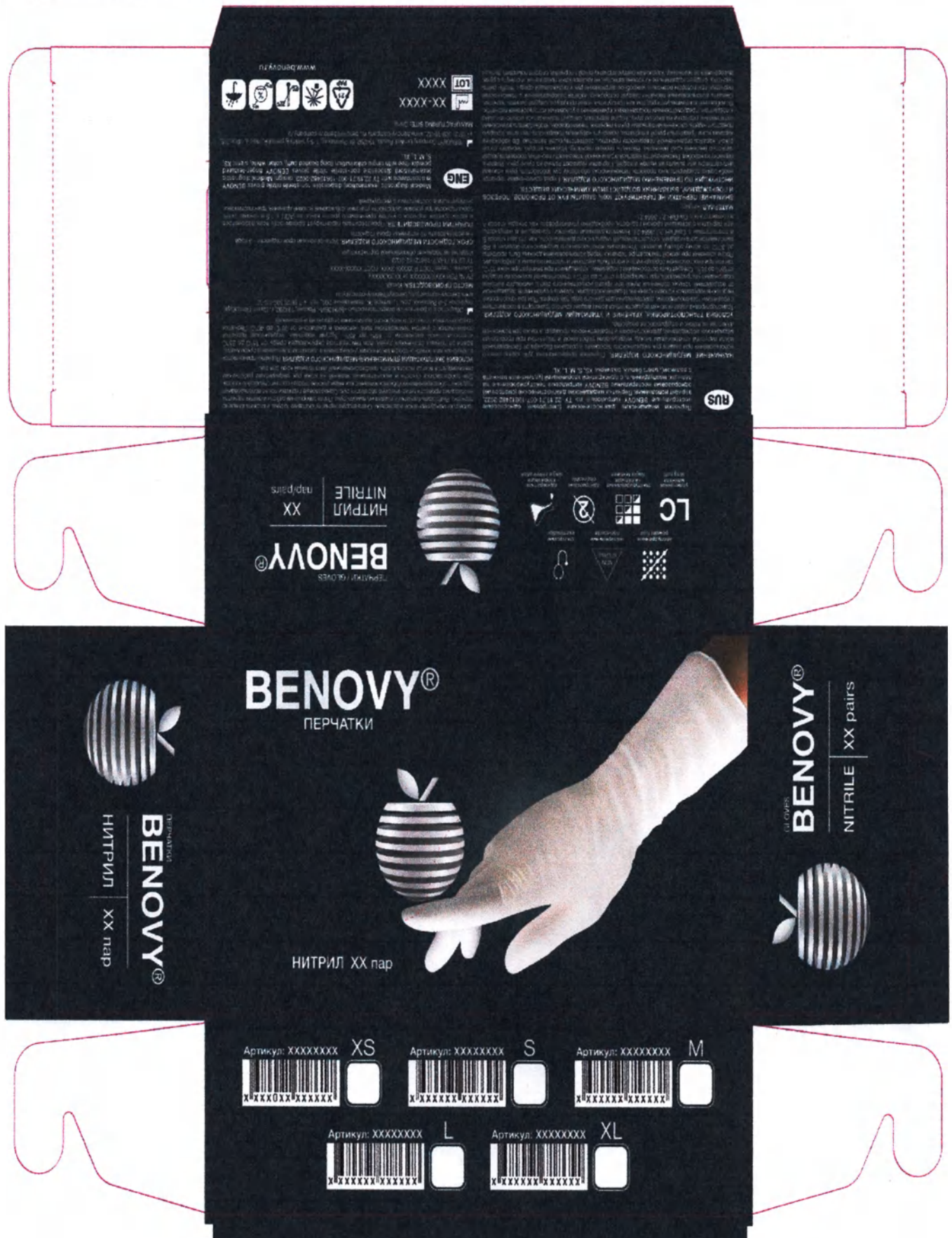

RUS

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOBY нитриловые по ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOBY нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с однократной хлоринацией (удлиненная манжета с валиком), цвет: белый, размеры: XS, S, M, L, XL.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные перчатки, пришедшие в негодность, или перчатки с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

МАТЕРИАЛ: нитрил.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки. Извлечь перчатку из коробки. Рекомендуется касаться ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью (верхний край манжеты). Натянуть первую перчатку. Извлечь вторую перчатку голой рукой, касаясь ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью. Во избежание касания кожи предплечья рукой в перчатке, повернуть наружную поверхность перчатки, которую предстоит надеть, сложенными пальцами руки в перчатке, таким образом, чтобы сделать возможным натягивание перчатки на вторую руку. Надев перчатки, следует прикасаться исключительно к предметам, предусмотренным показаниями к применению и условиями использования перчаток. Во избежание контаминации перед тем, как приступить к новой процедуре, следует сменить перчатки. Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разрывов с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды. Чтобы снять перчатку, следует подцепить ее на уровне запястья, не касаясь кожи предплечья, и стянуть с руки, выворачивая ее наизнанку. Удерживая снятую перчатку рукой в перчатке, следует поместить пальцы

голой руки между перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатав ее по руке, и вложить в первую перчатку. Выбросить перчатки и тщательно вымыть руки. После завершения работы и снятия перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук. Одноразовые перчатки после использования подлежат обеззараживанию/обезвреживанию как медицинские отходы соответствующего класса. Для профилактики сухости и нежелательных явлений на коже рук медицинским работникам рекомендуется всегда использовать профессиональный питательный крем для рук.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЯ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Будучи надетыми, медицинские перчатки применяются с учетом температуры тела человека в диапазоне от 36°C до 40°C. Перчатки предназначены только для наружного применения (изделие не инвазивное).

Общество с ограниченной ответственностью «БИНОВИ», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, дом 1, литера Ж, помещение 205, тел. + 7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: Китай.

РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Соответствует ГОСТ Р XXXXX-XXXX, ГОСТ XXXXX-XXXX

ТУ 22.19.71-007-19812462-2023

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Установленный срок годности - 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик перчаток с учетом приемлемого уровня качества (AQL) ≤ 1.5 в течение всего срока годности при условии целостности упаковки, соблюдения условий хранения, транспортировки, эксплуатации в соответствии с инструкцией.

ENG

Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOBY in accordance with TУ 22.19.71-007-19812462-2023, design: Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOBY finger-textured powder-free with single chlorination (long beaded cuff), color: white, sizes: XS, S, M, L, XL.

"BENOBY" Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy pereulok, litera J, office 205, +7 (812) 309-16-32; www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru.

MANUFACTURING SITE: China.



XX-XXXX
XXXX



www.benovy.ru

Вариант исполнения №2. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVO нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с внутренним полимерным покрытием, повышенной плотности (High Density) (манжета с валиком), цвет: зеленый.



RUS

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVO нитриловые по ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVO нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с внутренним полимерным покрытием, повышенной плотности (High Density) (манжета с валиком), цвет: зеленый, размеры: XS, S, M, L, XL.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные перчатки, пришедшие в негодность, или перчатки с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

МАТЕРИАЛ: нитрил.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки. Извлечь перчатку из коробки. Рекомендуется касаться ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью (верхний край манжеты). Натянуть первую перчатку. Извлечь вторую перчатку голый рукой, касаясь ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью. Во избежание касания кожи предплечья рукой в перчатке, повернуть наружную поверхность перчатки, которую предстоит надеть, сложенными пальцами руки в перчатке, таким образом, чтобы сделать возможным натягивание перчатки на вторую руку. Надев перчатки, следует прикасаться исключительно к предметам, предусмотренным показаниями к применению и условиями использования перчаток. Во избежание контаминации перед тем, как приступить к новой процедуре, следует сменить перчатки. Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды. Чтобы снять перчатку, следует подцепить ее на уровне запястья, не касаясь кожи предплечья, и стянуть с руки, выворачивая ее наизнанку. Удерживая снятую перчатку рукой в перчатке, следует поместить пальцы голый руки между перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатав ее по руке, и вложить в первую

перчатку. Выбросить перчатки и тщательно вымыть руки. После завершения работы и снятия перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук. Одноразовые перчатки после использования подлежат обеззараживанию/обезвреживанию как медицинские отходы соответствующего класса. Для профилактики сухости и нежелательных явлений на коже рук медицинским работникам рекомендуется всегда использовать профессиональный питательный крем для рук.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЯ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Будучи надетыми, медицинские перчатки применяются с учетом температуры тела человека в диапазоне от 36°C до 40°C. Перчатки предназначены только для наружного применения (изделие не инвазивное).

Общество с ограниченной ответственностью «БИОНИ», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, дом 1, литера Ж, помещение 205, тел. + 7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: Китай.

РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Соответствует ГОСТ Р XXXXX-XXXX, ГОСТ XXXXX-XXXX

ТУ 22.19.71-007-19812462-2023

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Установленный срок годности - 3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик перчаток с учетом приемлемого уровня качества (AQL) ≤ 1.5 в течение всего срока годности при условии целостности упаковки, соблюдения условий хранения, транспортировки, эксплуатации в соответствии с инструкцией.

ENG

Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVO in accordance with TУ 22.19.71-007-19812462-2023, design: Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVO finger-textured powder-free with internal polymer coating, High Density (beaded cuff), color: green, sizes: XS, S, M, L, XL.

"BENOVO" Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy pereulok, litera J, office 205, +7 (812) 309-16-32; www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru.

MANUFACTURING SITE: China.



XX-XXXX
XXXX



www.benovy.ru

Вариант исполнения №3. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVO нитриловые с выраженной ромбовидной текстурой по всей поверхности для улучшенного сцепления, неопудренные, повышенной плотности (High Density) (удлиненная манжета с валиком), цвет: оранжевый.



RUS

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVOY нитриловые по ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVOY нитриловые с выраженной ромбовидной текстурой по всей поверхности для улучшенного сцепления, неопудренные, повышенной плотности (High Density) (удлиненная манжета с валиком), цвет: оранжевый, размеры: XS, S, M, L, XL.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные перчатки, пришедшие в негодность, или перчатки с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

МАТЕРИАЛ: нитрил.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки. Извлечь перчатку из коробки. Рекомендуется касаться ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью (верхний край манжеты). Натянуть первую перчатку. Извлечь вторую перчатку голый рукой, касаясь ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью. Во избежание касания кожи предплечья рукой в перчатке, повернуть наружную поверхность перчатки, которую предстоит надеть, сложенными пальцами руки в перчатке, таким образом, чтобы сделать возможным натягивание перчатки на вторую руку. Надев перчатки, следует прикасаться исключительно к предметам, предусмотренным показаниями к применению и условиями использования перчаток. Во избежание контаминации перед тем, как приступить к новой процедуре, следует сменить перчатки. Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разрывания с поверхностями перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды. Чтобы снять перчатку, следует подцепить ее на уровне запястья, не касаясь кожи предплечья, и стянуть с руки, выворачивая ее наизнанку. Удерживая снятую перчатку рукой в перчатке, следует поместить пальцы голый руки между перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатав ее по руке, и вложить

в первую перчатку. Выбросить перчатки и тщательно вымыть руки. После завершения работы и снятия перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук. Одноразовые перчатки после использования подлежат обеззараживанию/обезвреживанию как медицинские отходы соответствующего класса. Для профилактики сухости и нежелательных явлений на коже рук медицинским работникам рекомендуется всегда использовать профессиональный питательный крем для рук.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЯ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Будучи надетыми, медицинские перчатки применяются с учетом температуры тела человека в диапазоне от 36°C до 40°C. Перчатки предназначены только для наружного применения (изделие не инвазивное).

Общество с ограниченной ответственностью «БИНОВИ», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, дом 1, литера Ж, помещение 205, тел. + 7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: Китай.

ПУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Соответствует ГОСТ Р XXXXX-XXXX, ГОСТ XXXXX-XXXX

ТУ 22.19.71-007-19812462-2023

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Установленный срок годности - 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик перчаток с учетом приемлемого уровня качества (AQL) ≤ 1.5 в течение всего срока годности при условии целостности упаковки, соблюдения условий хранения, транспортировки, эксплуатации в соответствии с инструкцией.

ENG

Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVOY in accordance with TУ 22.19.71-007-19812462-2023, design: Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVOY with diamond-shaped texture for better adhesion, powder-free, High Density (long beaded cuff), color: orange, sizes: XS, S, M, L, XL.

"BENOVOY" Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy pereulok, litera J, office 205, +7 (812) 309-16-32; www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru.

MANUFACTURING SITE: China.



XX-XXXX


XXXX



www.benovy.ru

Дизайн №3.

Вариант исполнения №4. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные **BENOVY DENTAL FORMULA** нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с однократной хлоринацией (манжета с валиком), цвет: фуксия.

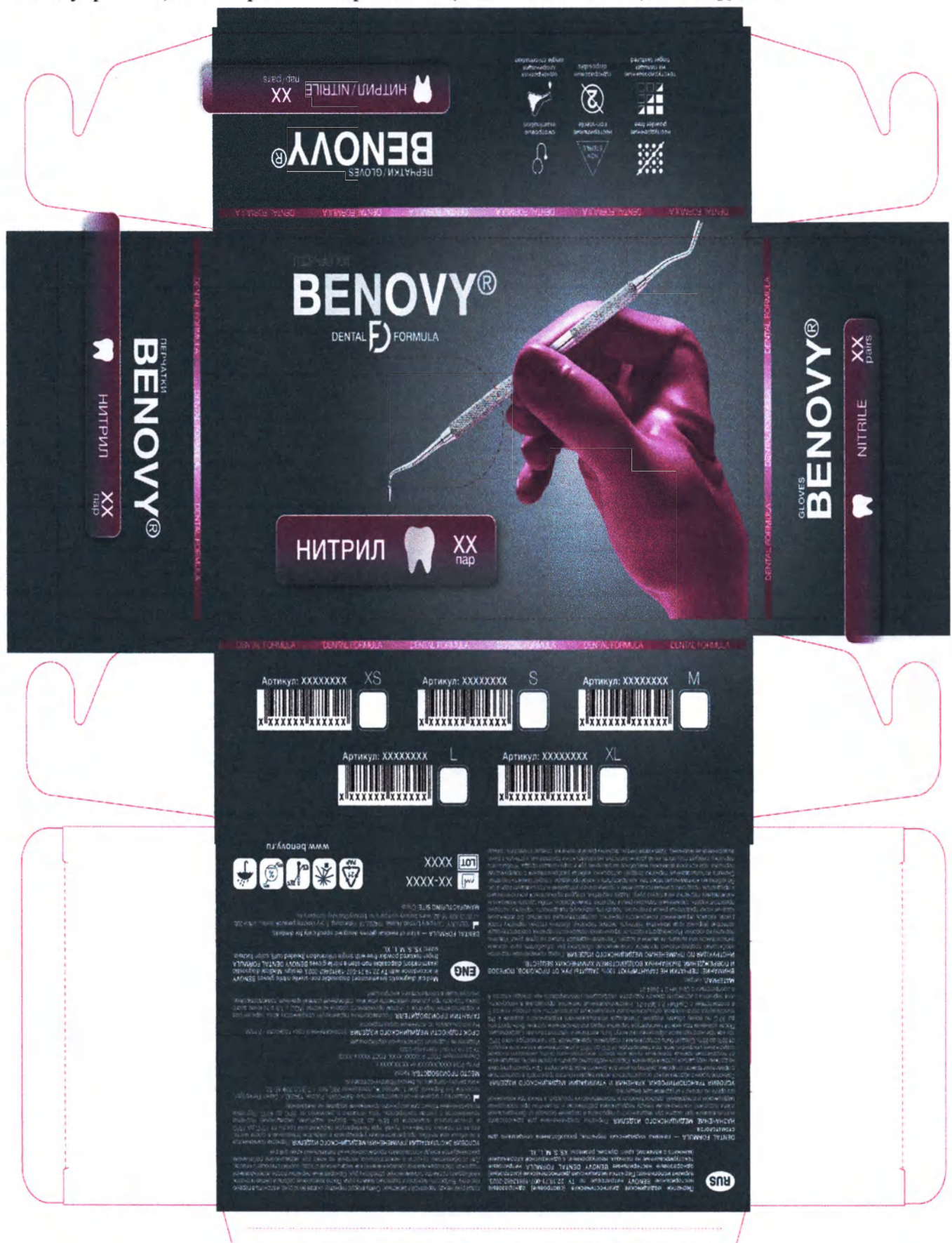

RUS

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVO нитриловые по ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVO DENTAL FORMULA нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с однократной хлоринацией (манжета с валиком), цвет: фуксия, размеры: XS, S, M, L, XL.

DENTAL FORMULA — линейка медицинских перчаток, разработанная специально для стоматологов.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные перчатки, пришедшие в негодность, или перчатки с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

МАТЕРИАЛ: нитрил.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки. Извлечь перчатку из коробки. Рекомендуется касаться ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью (верхний край манжеты). Натянуть первую перчатку. Извлечь вторую перчатку голой рукой, касаясь ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью. Во избежание касания кожи предплечья рукой в перчатке, повернуть наружную поверхность перчатки, которую предстоит надеть, сложенными пальцами руки в перчатке, таким образом, чтобы сделать возможным натягивание перчатки на вторую руку. Надев перчатки, следует прикасаться исключительно к предметам, предусмотренным показаниями к применению и условиями использования перчаток. Во избежание контаминации перед тем, как приступить к новой процедуре, следует сменить перчатки. Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды. Чтобы снять перчатку, следует подцепить ее на уровне запястья, не касаясь кожи предплечья, и стянуть с руки, выворачивая ее наизнанку. Удерживая снятую перчатку рукой в перчатке, следует поместить пальцы

голой руки между перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатав ее по руке, и вложить в первую перчатку. Выбросить перчатки и тщательно вымыть руки. После завершения работы и снятия перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук. Одноразовые перчатки после использования подлежат обеззараживанию/обезвреживанию как медицинские отходы соответствующего класса. Для профилактики сухости и нежелательных явлений на коже рук медицинским работникам рекомендуется всегда использовать профессиональный питательный крем для рук.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЯ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Будучи надетыми, медицинские перчатки применяются с учетом температуры тела человека в диапазоне от 36°C до 40°C. Перчатки предназначены только для наружного применения (изделие не инвазивное).

Общество с ограниченной ответственностью «БИНОВИ», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, дом 1, литера Ж, помещение 205, тел. + 7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: Китай.

РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Соответствует ГОСТ Р XXXXX-XXXX, ГОСТ XXXXX-XXXX ТУ 22.19.71-007-19812462-2023

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Установленный срок годности - 3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик перчаток с учетом приемлемого уровня качества (AQL) ≤ 1.5 в течение всего срока годности при условии целостности упаковки, соблюдения условий хранения, транспортировки, эксплуатации в соответствии с инструкцией.

ENG

Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVO in accordance with ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, design: Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVO DENTAL FORMULA finger-textured powder-free with single chlorination (beaded cuff), color: fuchsia, sizes: XS, S, M, L, XL.


DENTAL FORMULA — a line of medical gloves designed specifically for dentists.

“BENOVO” Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy pereulok, litera J, office 205, +7 (812) 309-16-32; www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru.

MANUFACTURING SITE: China.




XX-XXXX
XXXX

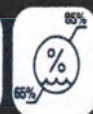

www.benovy.ru

Вариант исполнения №5. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные **BENOVY DENTAL FORMULA** нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с двукратной хлоринацией, повышенной плотности (High Density) (удлиненная манжета с валиком), цвет: розовый.

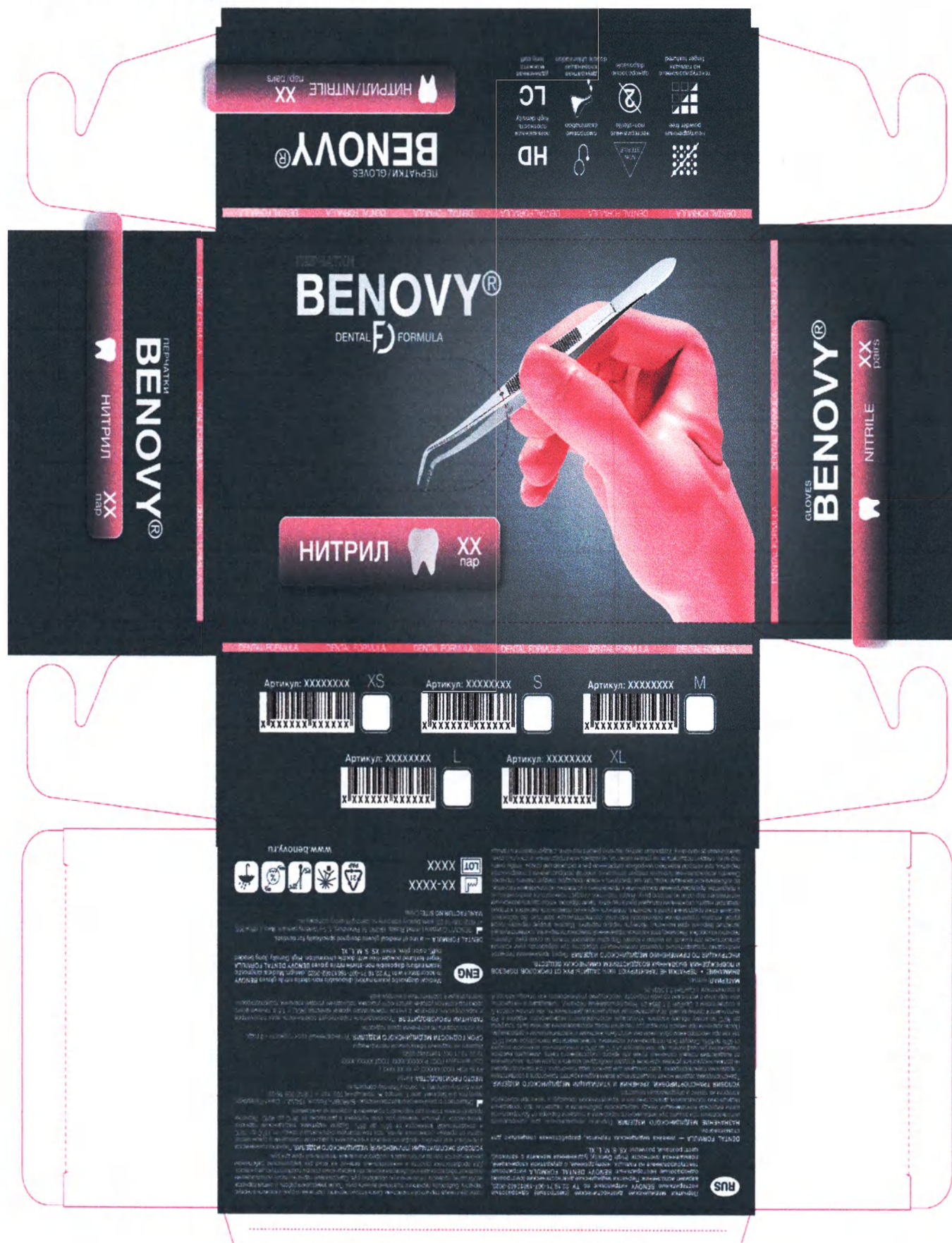

RUS

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOY нитриловые по ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOY DENTAL FORMULA нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с двукратной хлоринацией, повышенной плотности (High Density) (удлиненная манжета с валиком), цвет: розовый, размеры: XS, S, M, L, XL.

DENTAL FORMULA — линейка медицинских перчаток, разработанная специально для стоматологов.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные перчатки, пришедшие в негодность, или перчатки с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

МАТЕРИАЛ: нитрил.

ВНИМАНИЕ! • ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки. Извлечь перчатку из коробки. Рекомендуется касаться ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью (верхний край манжеты). Натянуть первую перчатку. Извлечь вторую перчатку голой рукой, касаясь ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью. Во избежание касания кожи предплечья рукой в перчатке, повернуть наружную поверхность перчатки, которую предстоит надеть, сложенными пальцами руки в перчатке, таким образом, чтобы сделать возможным натягивание перчатки на вторую руку. Надев перчатки, следует прикасаться исключительно к предметам, предусмотренным показаниями к применению и условиями использования перчаток. Во избежание контаминации перед тем, как приступить к новой процедуре, следует сменить перчатки. Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды. Чтобы снять перчатку, следует подцепить ее на уровне запястья, не касаясь кожи предплечья, и стянуть с руки, выворачивая ее наизнанку. Удерживая снятую перчатку рукой в перчатке, следует поместить пальцы

голой руки между перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатав ее по руке, и вложить в первую перчатку. Выбросить перчатки и тщательно вымыть руки. После завершения работы и снятия перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук. Одноразовые перчатки после использования подлежат обеззараживанию/обезвреживанию как медицинские отходы соответствующего класса. Для профилактики сухости и нежелательных явлений на коже рук медицинским работникам рекомендуется всегда использовать профессиональный питательный крем для рук.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЯ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Будучи надетыми, медицинские перчатки применяются с учетом температуры тела человека в диапазоне от 36°C до 40°C. Перчатки предназначены только для наружного применения (изделие не инвазивное).

Общество с ограниченной ответственностью «БИОНИ», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, дом 1, литера Ж, помещение 205, тел. + 7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: Китай.

РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Соответствует ГОСТ Р XXXXX-XXX, ГОСТ XXXXX-XXXXX

ТУ 22.19.71-007-19812462-2023

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Установленный срок годности - 3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик перчаток с учетом приемлемого уровня качества (AQL) ≤ 1.5 в течение всего срока годности при условии целостности упаковки, соблюдения условий хранения, транспортировки, эксплуатации в соответствии с инструкцией.

ENG

Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOY in accordance with TУ 22.19.71-007-19812462-2023, design: Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOY DENTAL FORMULA finger-textured powder-free with double chlorination, High Density (long beaded cuff), color: pink, sizes: XS, S, M, L, XL


DENTAL FORMULA — a line of medical gloves designed specifically for dentists.

“BENOY” Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy pereulok, litera J, office 205, +7 (812) 309-16-32; www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru.

MANUFACTURING SITE: China.




XX-XXXX
XXXX

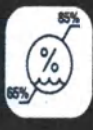

www.benovy.ru

Вариант исполнения №6. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные **BENOVY DENTAL FORMULA** нитриловые с выраженной ромбовидной текстурой по всей поверхности для улучшенного сцепления, неопудренные, повышенной плотности (High Density) (манжета с валиком), цвет: черный.

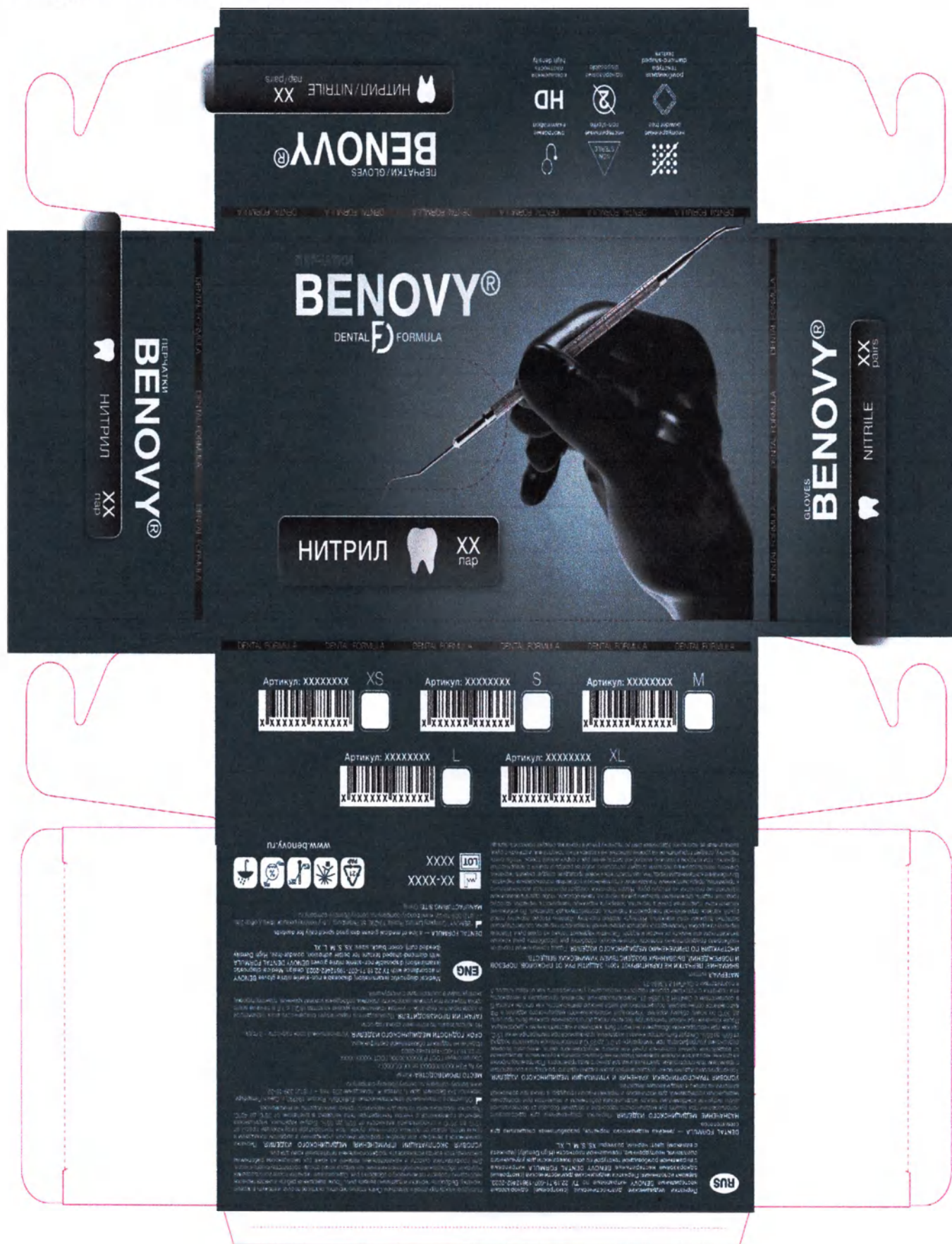

RUS

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVO нитриловые по ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVO DENTAL FORMULA нитриловые с выраженной ромбовидной текстурой по всей поверхности для улучшенного сцепления, неопудренные, повышенной плотности (High Density) (манжета с валиком), цвет: черный, размеры: XS, S, M, L, XL.

DENTAL FORMULA — линейка медицинских перчаток, разработанная специально для стоматологов.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки предназначены для одноразового использования при защите рук медицинского персонала и создания барьера от бактериальной и/или вирусной контаминации между медицинским работником и пациентом при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, а также при возможной аллергии на латекс и опудривающее вещество.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта. При транспортировке не должны нарушаться условия хранения. Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха от 65% до 85%. Следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия. Утилизация использованного медицинского изделия в РФ выполняется организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, как отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные перчатки, пришедшие в негодность, или перчатки с истекшим сроком годности, необходимо утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

МАТЕРИАЛ: нитрил.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЧАТКИ НЕ ГАРАНТИРУЮТ 100% ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПРОКОЛОВ, ПОРЕЗОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перед применением перчаток необходимо предварительно провести гигиеническую обработку рук (обработать руки кожным антисептиком или вымыть их мылом и водой). Перчатки надевают только на сухие руки. Извлечь перчатку из коробки. Рекомендуется касаться ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью (верхний край манжеты). Натянуть первую перчатку. Извлечь вторую перчатку голой рукой, касаясь ограниченной поверхности перчатки, соответствующей запястью. Во избежание касания кожи предплечья рукой в перчатке, повернуть наружную поверхность перчатки, которую предстоит надеть, сложенными пальцами руки в перчатке, таким образом, чтобы сделать возможным натягивание перчатки на вторую руку. Надев перчатки, следует прикасаться исключительно к предметам, предусмотренным показаниями к применению и условиями использования перчаток. Во избежание контаминации перед тем, как приступить к новой процедуре, следует сменить перчатки. Снимать использованные перчатки следует осторожно, избегая разбрызгивания с поверхностей перчатки, при котором возможно микробное загрязнение рук и окружающей среды. Чтобы снять перчатку, следует подцепить ее на уровне запястья, не касаясь кожи предплечья, и стянуть с руки, выворачивая ее наизнанку. Удерживая снятую перчатку рукой в перчатке, следует поместить пальцы

голой руки между перчаткой и запястьем. Снять вторую перчатку, скатав ее по руке, и вложить в первую перчатку. Выбросить перчатки и тщательно вымыть руки. После завершения работы и снятия перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук. Одноразовые перчатки после использования подлежат обеззараживанию/обезвреживанию как медицинские отходы соответствующего класса. Для профилактики сухости и нежелательных явлений на коже рук медицинским работникам рекомендуется всегда использовать профессиональный питательный крем для рук.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЯ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Перчатки применяются в лечебных или лечебно-профилактических учреждениях в закрытом помещении в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от 15°C до 25°C и относительной влажности от 65% до 85%. Будучи надетыми, медицинские перчатки применяются с учетом температуры тела человека в диапазоне от 36°C до 40°C. Перчатки предназначены только для наружного применения (изделие не инвазивное).

Общество с ограниченной ответственностью «БИНОВИ», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, дом 1, литера Ж, помещение 205, тел. + 7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: Китай.

РУ № РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX г.

Соответствует ГОСТ Р XXXXX-XXXX, ГОСТ XXXXX-XXXX

ТУ 22.19.71-007-19812462-2023

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Установленный срок годности - 3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик перчаток с учетом приемлемого уровня качества (AQL) ≤ 1.5 в течение всего срока годности при условии целостности упаковки, соблюдения условий хранения, транспортировки, эксплуатации в соответствии с инструкцией.

ENG

Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVO in accordance with TУ 22.19.71-007-19812462-2023, design: Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVO DENTAL FORMULA with diamond-shaped texture for better adhesion, powder-free, High Density (beaded cuff), color: black, sizes: XS, S, M, L, XL


DENTAL FORMULA — a line of medical gloves designed specifically for dentists.

“BENOVO” Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy pereulok, litera J, office 205, +7 (812) 309-16-32; www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru.

MANUFACTURING SITE: China.



XX-XXXX
XXXX

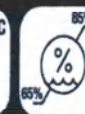

www.benovy.ru

Всего прошито и скреплено
печатью 34 листа / 08 /
Ген. дир. ЧУКАНОВА А.А.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БИНОВИ»

_____ А.А. Чуканова

«27» февраля 2024 г.



МАКЕТЫ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ
медицинского изделия

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые
нестерильные BENOY нитриловые по ТУ 22.19.71-007-19812462-
2023, в вариантах исполнения

г. Санкт-Петербург

1. Макет индивидуальной транспортной упаковки (размер напечатан на упаковке)

[illegible]

BENOVY® ПЕРЧАТКИ

XX	(МЕСТО ДЛЯ УКАЗАНИЯ ЦВЕТА)
	НИТРИЛ

XXXXX

Артикул: XXXXXXXX

КОЛИЧЕСТВО В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКЕ: **XX ПАР**

КОЛИЧЕСТВО В ТРАНСПОРТНОЙ КОРОБКЕ: **XXX ПАР**



X XX XXXXX XXXXX X

LOT XXXX

XX-XXXX

BENOVY® GLOVES

XX	(МЕСТО ДЛЯ УКАЗАНИЯ ЦВЕТА) (PLACE FOR COLOR)
	НИТРИЛ (NITRILE)

XXXXX

Артикул: XXXXXXXX

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVY нитриловые по ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVY нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с внутренним полимерным покрытием/однократной хлоринацией/двукратной хлоринацией (манжета с валиком/удлиненная манжета с валиком), цвет: XXXX, размер: XX.

Общество с ограниченной ответственностью «БИНОВИ», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, дом 1, литера Ж, помещение 205, тел. + 7 (812) 309-16-32; www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: Китай.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Установленный срок годности – 3 года. Не использовать по истечении срока годности.



НИТРИЛ	XX
(МЕСТО ДЛЯ УКАЗАНИЯ ЦВЕТА)	

BENOVY® ПЕРЧАТКИ

BENOVY® ПЕРЧАТКИ

XX	(МЕСТО ДЛЯ УКАЗАНИЯ ЦВЕТА)
	НИТРИЛ

XXXXXX

Артикул: XXXXXXXX

КОЛИЧЕСТВО В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКЕ: XX ПАР

КОЛИЧЕСТВО В ТРАНСПОРТНОЙ КОРОБКЕ: XXX ПАР



X XX XXXXX XXXXX X

LOT XXXX

XX-XXXX

BENOVY® GLOVES

XX	(МЕСТО ДЛЯ УКАЗАНИЯ ЦВЕТА) (PLACE FOR COLOR)
	НИТРИЛ (NITRILE)

XXXXXX

Артикул: XXXXXXXX

Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVY in accordance with ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, design: Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVY finger-textured powder-free with internal polymer coating/single chlorination/double chlorination (beaded cuff/long beaded cuff), color: XXXX, size: XX.

“BENOVY” Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy pereulok, litera J, office 205, +7 (812) 309-16-32; www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru
MANUFACTURING SITE: China.

SHELF LIFE OF THE MEDICAL DEVICE. The established shelf life is 3 years. Do not use after the expiry date.



2. Макет универсальной транспортной упаковки (на упаковке напечатаны все размеры, нужный отмечается маркером)

(МЕСТО ДЛЯ УКАЗАНИЯ ЦВЕТА)

НИТРИЛ

BENOVY® ПЕРЧАТКИ

(МЕСТО ДЛЯ УКАЗАНИЯ ЦВЕТА)

НИТРИЛ

КОЛИЧЕСТВО В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКЕ: **XX ПАР**
КОЛИЧЕСТВО В ТРАНСПОРТНОЙ КОРОБКЕ: **XXX ПАР**

LOT: XXXX
XX-XXXX

BENOVY®
GLOVES

BENOVY® ПЕРЧАТКИ

(МЕСТО ДЛЯ УКАЗАНИЯ ЦВЕТА)

НИТРИЛ

Перчатки медицинские диагностические (стерильные) одноразовые нестерильные BENOVY нитриловые по ТУ 22.18.71-007-19812482-2023, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (стерильные) одноразовые нестерильные BENOVY нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с внутренним полимерным покрытием/односторонней хлорировкой/двусторонней хлорировкой (лангета с валиком)/удвоенной лангета с валиком, цвет: XXXX, размеры: XS, S, M, L, XL.

Общество с ограниченной ответственностью «БИОНИВ», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, дом 1, литера Ж, помещение 205, тел. +7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru
МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: Китай.
СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Установленный срок годности – 3 года.
Не использовать по истечении срока годности.

XX пар / XXX пар

20°C 24°C 28°C 32°C 36°C 40°C 44°C 48°C 52°C 56°C 60°C 64°C 68°C 72°C 76°C 80°C 84°C 88°C 92°C 96°C 100°C

BENOVY® ПЕРЧАТКИ

Артикул: XXXXXXXX XS

1 46 80091 71866 9

Артикул: XXXXXXXX S

1 46 80091 71867 6

Артикул: XXXXXXXX M

1 46 80091 71868 3

Артикул: XXXXXXXX L

1 46 80091 71869 0

Артикул: XXXXXXXX XL

1 46 80091 71870 6

НИТРИЛ
(PLACE FOR COLOR)

BENOVY® GLOVES

(PLACE FOR COLOR)

NITRILE

Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVY in accordance with ТУ 22.18.71-007-19812482-2023, design: Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVY finger-textured powder-free with internal polymer coating/single chlorination/double chlorination (beaded cuff/long beaded cuff), color: XXXX, sizes: XS, S, M, L, XL.

«BENOVY» Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy pereulok, litera J, office 205, +7 (812) 309-16-32, www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru
MANUFACTURING SITE: China.
SHELF LIFE OF THE MEDICAL DEVICE. The established shelf life is 3 years. Do not use after the expiry date.

XX pairs / XXX pairs

20°C 24°C 28°C 32°C 36°C 40°C 44°C 48°C 52°C 56°C 60°C 64°C 68°C 72°C 76°C 80°C 84°C 88°C 92°C 96°C 100°C

BENOVY® ПЕРЧАТКИ

(МЕСТО ДЛЯ УКАЗАНИЯ ЦВЕТА)

НИТРИЛ

КОЛИЧЕСТВО В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКЕ: **XX ПАР**

КОЛИЧЕСТВО В ТРАНСПОРТНОЙ КОРОБКЕ: **XXX ПАР**

LOT XXXX

XX-XXXX

BENOVY® ПЕРЧАТКИ

(МЕСТО ДЛЯ УКАЗАНИЯ ЦВЕТА)

НИТРИЛ

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVY нитриловые по ТУ 22.19.71-007-19812462-2023, вариант исполнения: Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVY нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с внутренним полимерным покрытием/однократной хлоринацией/двукратной хлоринацией (манжета с валиком/удлиненная манжета с валиком), цвет: XXXX, размеры: XS, S, M, L, XL.

Общество с ограниченной ответственностью «БИНОВИ», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 5-й Верхний, дом 1, литера Ж, помещение 205, тел. + 7 (812) 309-16-32; www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА: Китай.

СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ. Установленный срок годности – 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

XX пар/XXX пар




Артикул: XXXXXXXX XS




1 46 80091 71866 9

Артикул: XXXXXXXX S

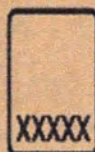

1 46 80091 71867 6

Артикул: XXXXXXXX M

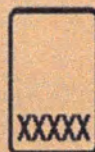


1 46 80091 71868 3

Артикул: XXXXXXXX L



1 46 80091 71869 0

Артикул: XXXXXXXX XL

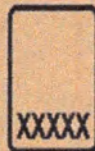

1 46 80091 71870 6

BENOVY®

GLOVES

(PLACE FOR COLOR)



NITRILE

Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVY in accordance with TY 22.19.71-007-19812462-2023, design: Medical diagnostic (examination) disposable non-sterile nitrile gloves BENOVY finger-textured powder-free with internal polymer coating/single chlorination/double chlorination (beaded cuff/long beaded cuff), color: XXXX, sizes: XS, S, M, L, XL

“BENOVY” Company Limited, Russia, 194292, St. Petersburg, 1, 5-y Verkhniy pereulok, litera J, office 205, +7 (812) 309-16-32; www.benovy-company.ru, benovy@benovy-company.ru
MANUFACTURING SITE: China.

SHELF LIFE OF THE MEDICAL DEVICE. The established shelf life is 3 years. Do not use after the expiry date.

XX pairs/XXX pairs

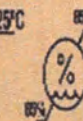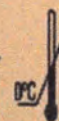

Всего прошито и скреплено
печать № _____ листа / 0
Ген. дир. ЧУКАНОВА



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «БИНОВИ»

Чуканова А.А.



«06» декабря 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
медицинского изделия

Перчатки медицинские диагностические (смотровые)
одноразовые нестерильные BENOY нитриловые по ТУ 22.19.71-
007-19812462-2023, в вариантах исполнения

г. Санкт-Петербург

Вариант исполнения №1:

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVO нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с внутренним полимерным покрытием/однократной хлоринацией/двукратной хлоринацией (манжета с валиком), цвет: голубой.



Вариант исполнения №1:

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVI нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с внутренним полимерным покрытием/однократной хлоринацией/двукратной хлоринацией (манжета с валиком), цвет: сиреневый.



Вариант исполнения №2:

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVI нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с внутренним полимерным покрытием/однократной хлоринацией/двукратной хлоринацией, повышенной плотности (High Density) (удлиненная манжета с валиком), цвет: черный.



Вариант исполнения №2:

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOXY нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с внутренним полимерным покрытием/однократной хлоринацией/двукратной хлоринацией, повышенной плотности (High Density) (удлиненная манжета с валиком), цвет: белый.



Вариант исполнения №3:

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOY нитриловые с выраженной ромбовидной текстурой по всей поверхности для улучшенного сцепления, неопудренные, повышенной плотности (High Density) (манжета с валиком), цвет: оранжевый.



Вариант исполнения №4:

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVO DENTAL FORMULA нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с внутренним полимерным покрытием/однократной хлоринацией/двукратной хлоринацией (манжета с валиком), цвет: зеленый.



Вариант исполнения №4:

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOY DENTAL FORMULA нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с внутренним полимерным покрытием/однократной хлоринацией/двукратной хлоринацией (манжета с валиком), цвет: розовый.



Вариант исполнения №5:

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVO DENTAL FORMULA нитриловые текстурированные на пальцах, неопудренные, с внутренним полимерным покрытием/однократной хлоринацией/двукратной хлоринацией, повышенной плотности (High Density) (манжета с валиком), цвет: фуксия.



Вариант исполнения №6:

Перчатки медицинские диагностические (смотровые) одноразовые нестерильные BENOVO DENTAL FORMULA нитриловые с выраженной ромбовидной текстурой по всей поверхности для улучшенного сцепления, неопудренные, повышенной плотности (High Density) (манжета с валиком), цвет: оранжевый.



