

Фото медицинского изделия

«Рентгеновский аппарат для интервенционных процедур "РЕНЕКС" по ТУ 26.60.11-045-54839165-2018, в исполнениях»

Производства: ООО «С.П.ГЕЛПИК» 117837 Москва, РОССИЯ, ул. Профсоюзная. 86, стр. 2 ИНН: 7728220318

Фото комплектующие:

Рисунок 1.

Штатив аппарата С-дуга модель DRS-600 производства фирмы GENORAY Co., Ltd., Корея.

Рисунок 2.

Генератор рентгеновского излучения модель GMT-015 производства фирмы GENORAY Co., Ltd., Корея.

Рисунок 3.

Усилитель рентгеновского изображений цифровой GENORAY серии ZEN с принадлежностями производства фирмы GENORAY Co., Ltd., Корея, (ПУ № ФСЗ 2012/11875) или Усилитель рентгеновского изображения УРИ-«РЕНЕКС» с принадлежностями по ТУ 9442-039-54839165-2011 производства ООО «С.П.ГЕЛПИК», Россия, (ПУ № ФСР 2012/13603).

Рисунок 4.

Рентгеновская трубка DF1803SBR производства фирмы «Toshiba Electron Tubes and Devices Co., Ltd.», Япония или Рентгеновская трубка RTM 70 производства фирмы «I.A.E.» («Industria Applicazioni Elettroniche»), Италия.

Рисунок 5.

Диафрагма ZIC-600 производства фирмы GENORAY Co., Ltd., Корея.

Рисунок 6.

Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур серии VacuDAP System производства фирмы «VacuTec Messtechnik GmbH», Германия, (ПУ № ФСЗ 2012/11816) или Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012 производства ООО НПП «Доза», Россия, (ПУ № РЗН 2014/1562).

Рисунок 7.

Мобильная тумба TRO-1300 производства фирмы GENORAY Co., Ltd., Корея.

Рисунок 8.

Монитор производства фирмы LG Electronics Inc., Корея или производства фирмы WIDE, Корея не более 2 шт. (при необходимости).

Рисунок 9.

Переключатель ножной производства фирмы GENORAY Co., Ltd., Корея.

Рисунок 10.

Переключатель ручной производства фирмы GENORAY Co., Ltd., Корея.

Рисунок 11.

Кассетодержатель производства фирмы GENORAY Co., Ltd., Корея (при необходимости).

Рисунок 12.

Пульт дистанционного управления ЛЖКМ.943129.013 производства фирмы ООО «С.П.ГЕЛПИК», Россия (при необходимости).

Рисунок 13.

Паспорт ЛЖКМ.26.60.11.045.001 ПС.

Рисунок 14.

Руководство по эксплуатации ЛЖКМ.26.60.11.045.001РЭ.

Рисунок 15.

Руководство оператора автоматизированного рабочего места врача ЛЖКМ.943129.045.000 РЭ.

Рисунок 16.

Руководство по монтажу ЛЖКМ.26.60.11.045.000 РМ.

Рисунок 17.

Краткое руководство ЛЖКМ.26.60.11.045.000 КР.

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «С.П.ГЕЛПИК»
А. Б. САМОЙЛОВ

[Подпись]



Фото общего вида:

Рисунок 18.

Рентгеновский аппарат для интервенционных процедур «РЕНЕКС», Исполнение 1.

Рисунок 19.


Рентгеновский аппарат для интервенционных процедур «РЕНЕКС», Исполнение 2.

Генеральный директор ООО «С.П.ГЕЛПИК»

Самойлов Андрей Борисович
(Ф.И.О)

"14" 09 2018 г.

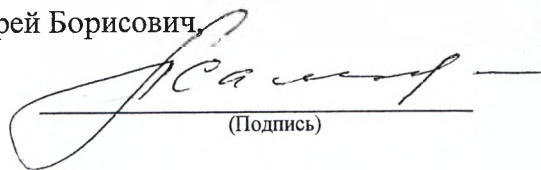


(Подпись)

Рентг

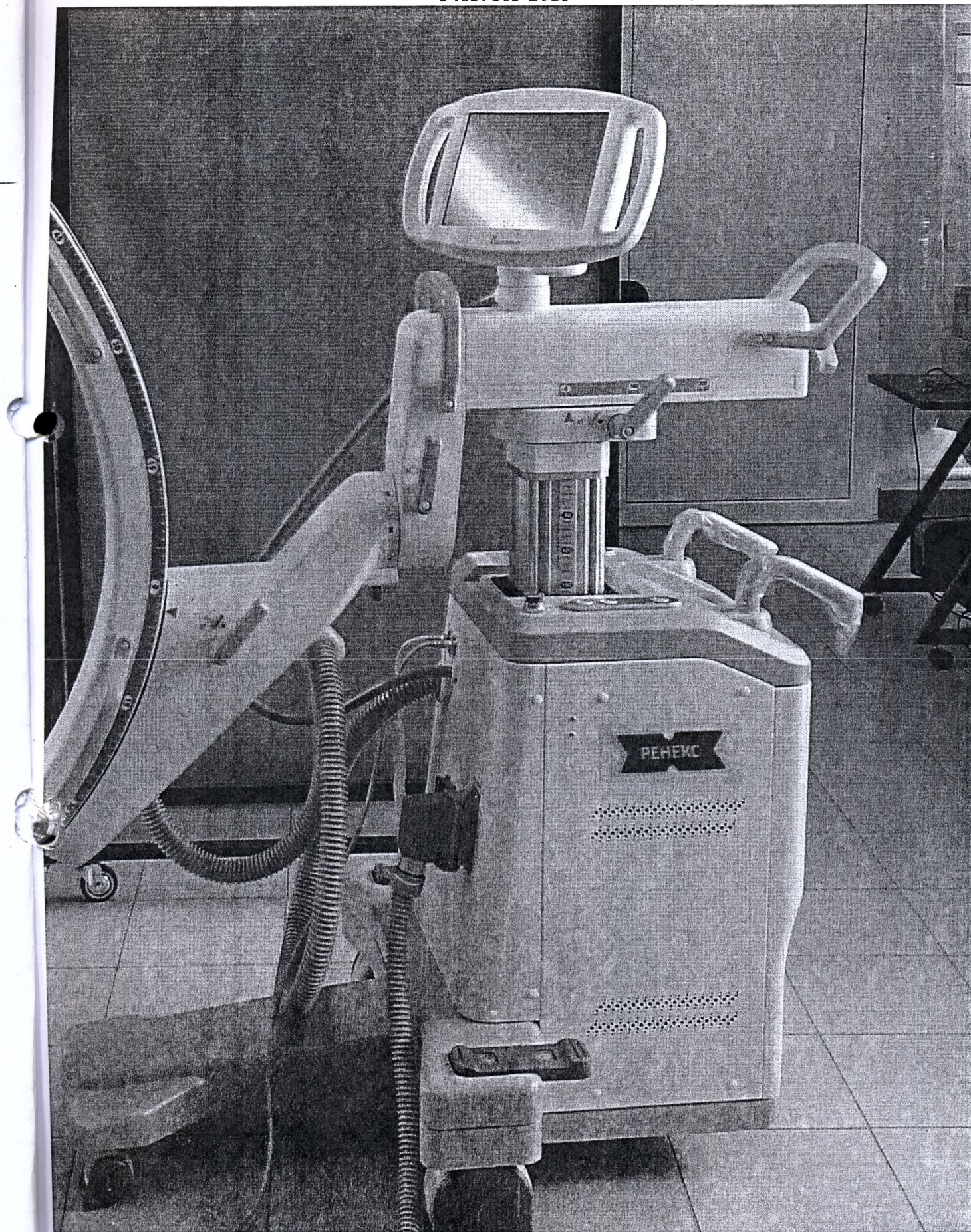


Рисунок 1

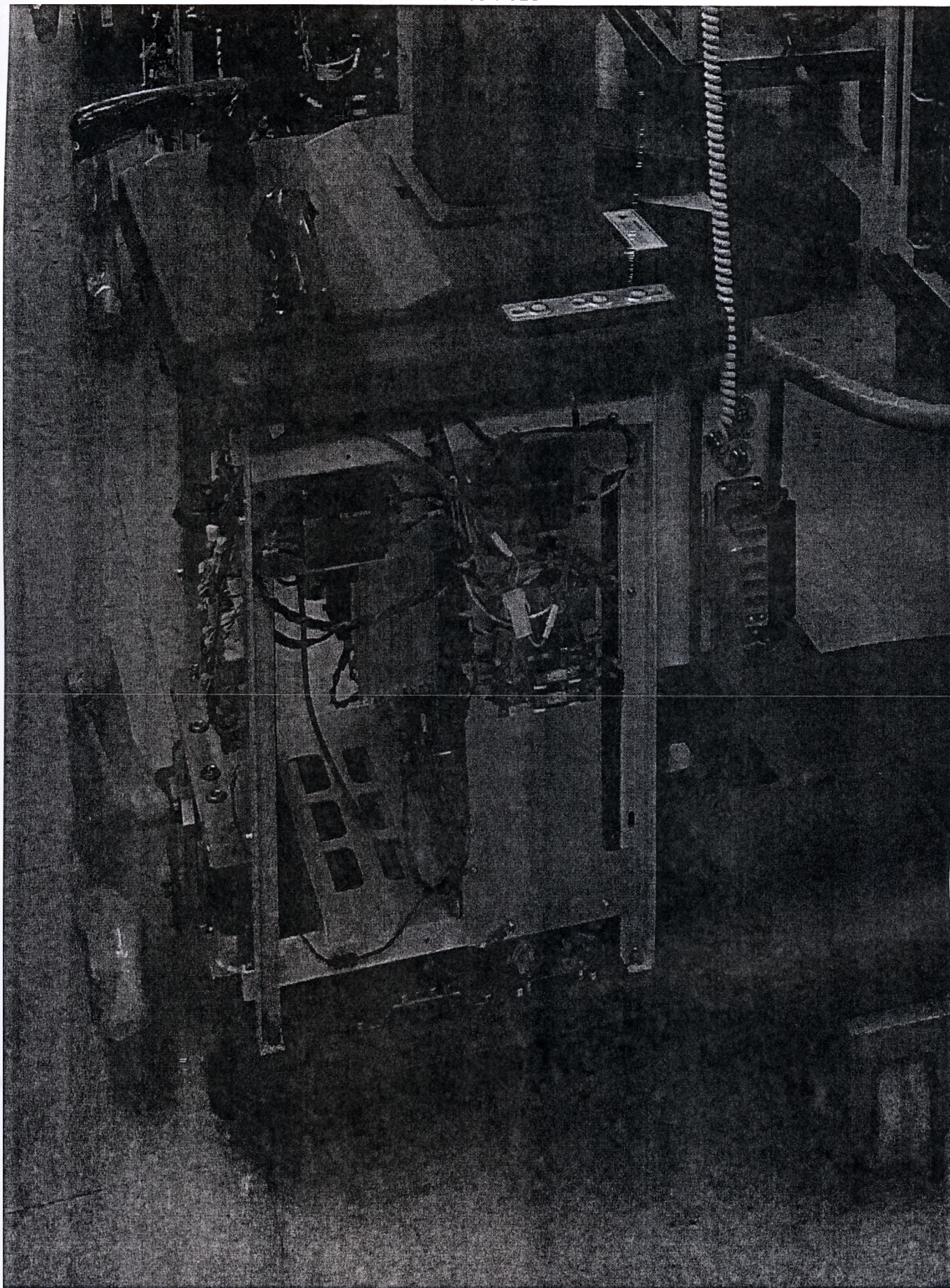


Рисунок 2

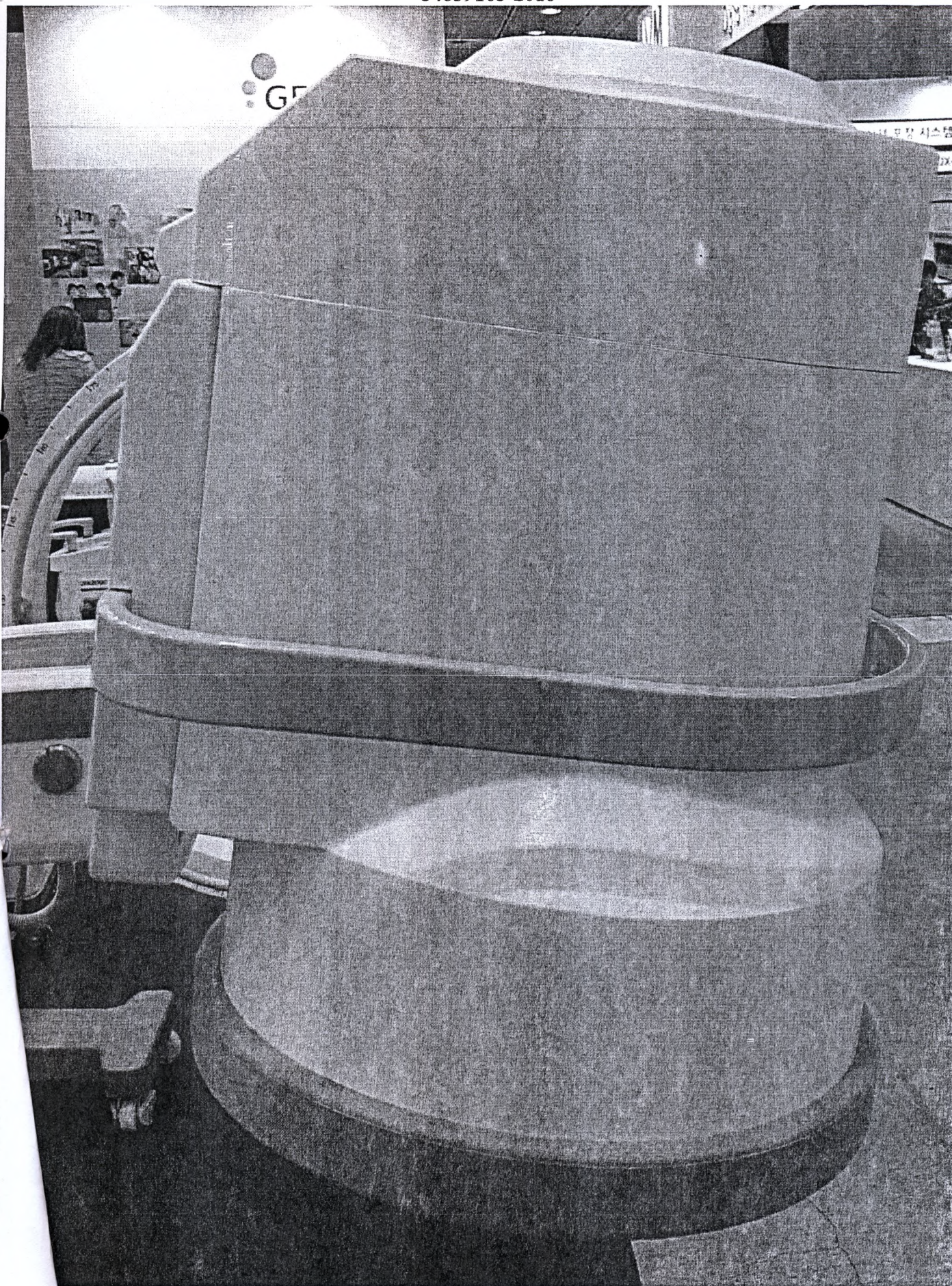


Рисунок 3

Рентгеновский аппарат для интервенционных процедур "РЕНЕКС" по ТУ 26.60.11-045-54839165-2018

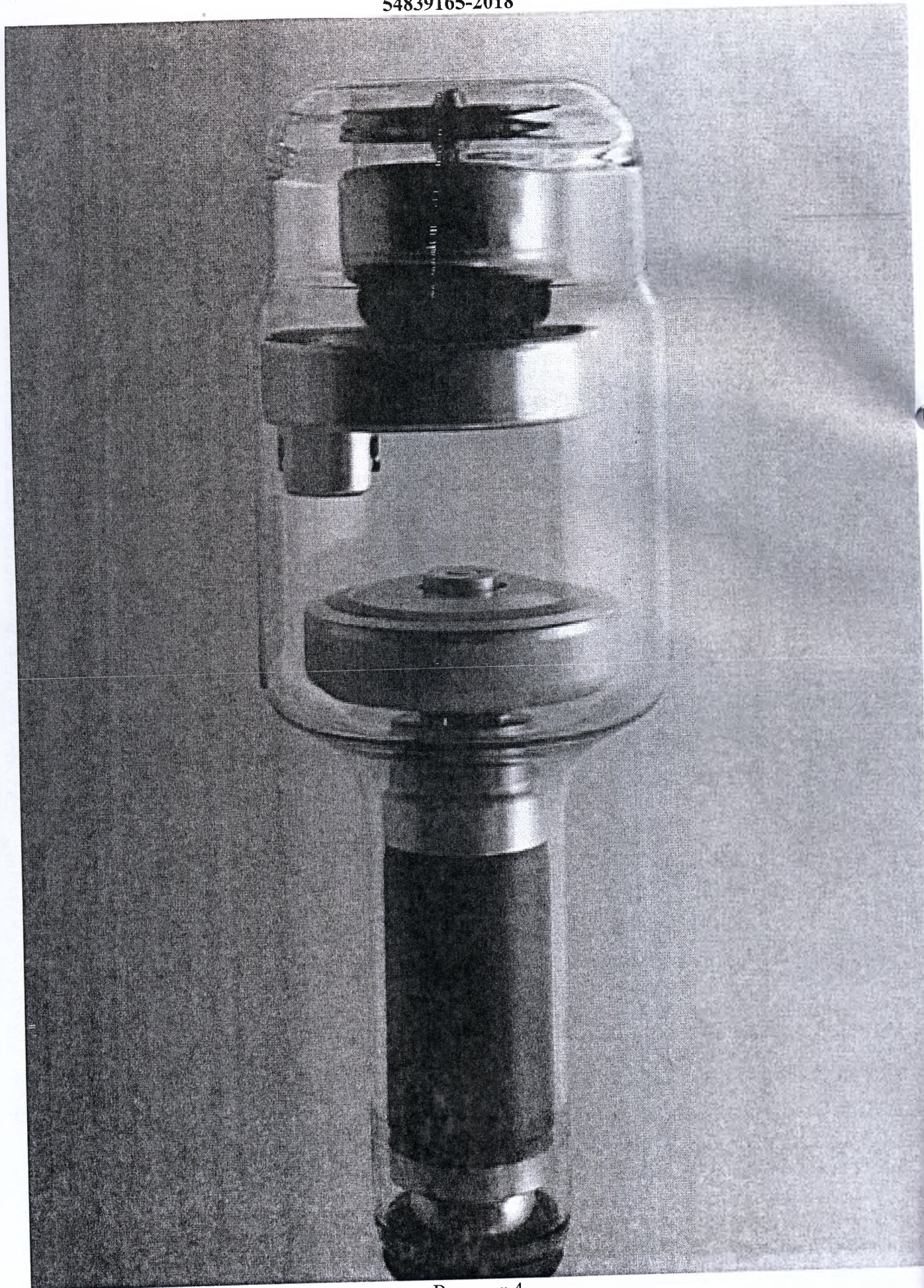
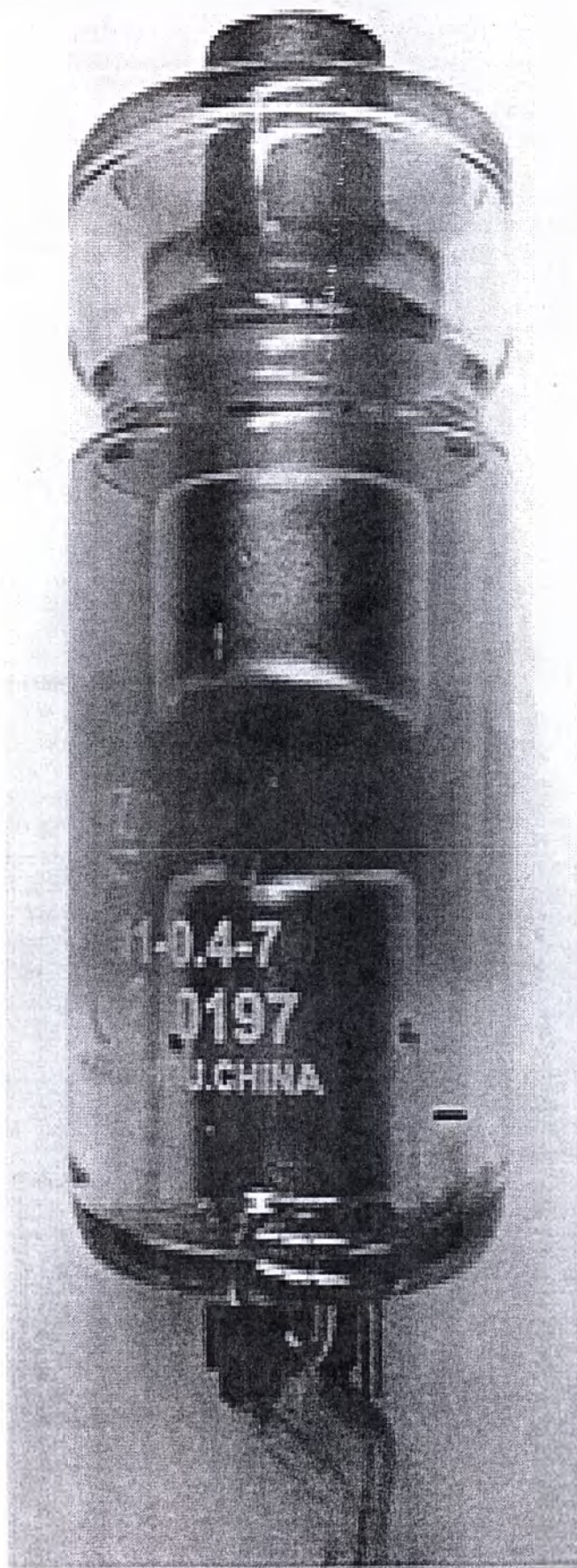


Рисунок 4



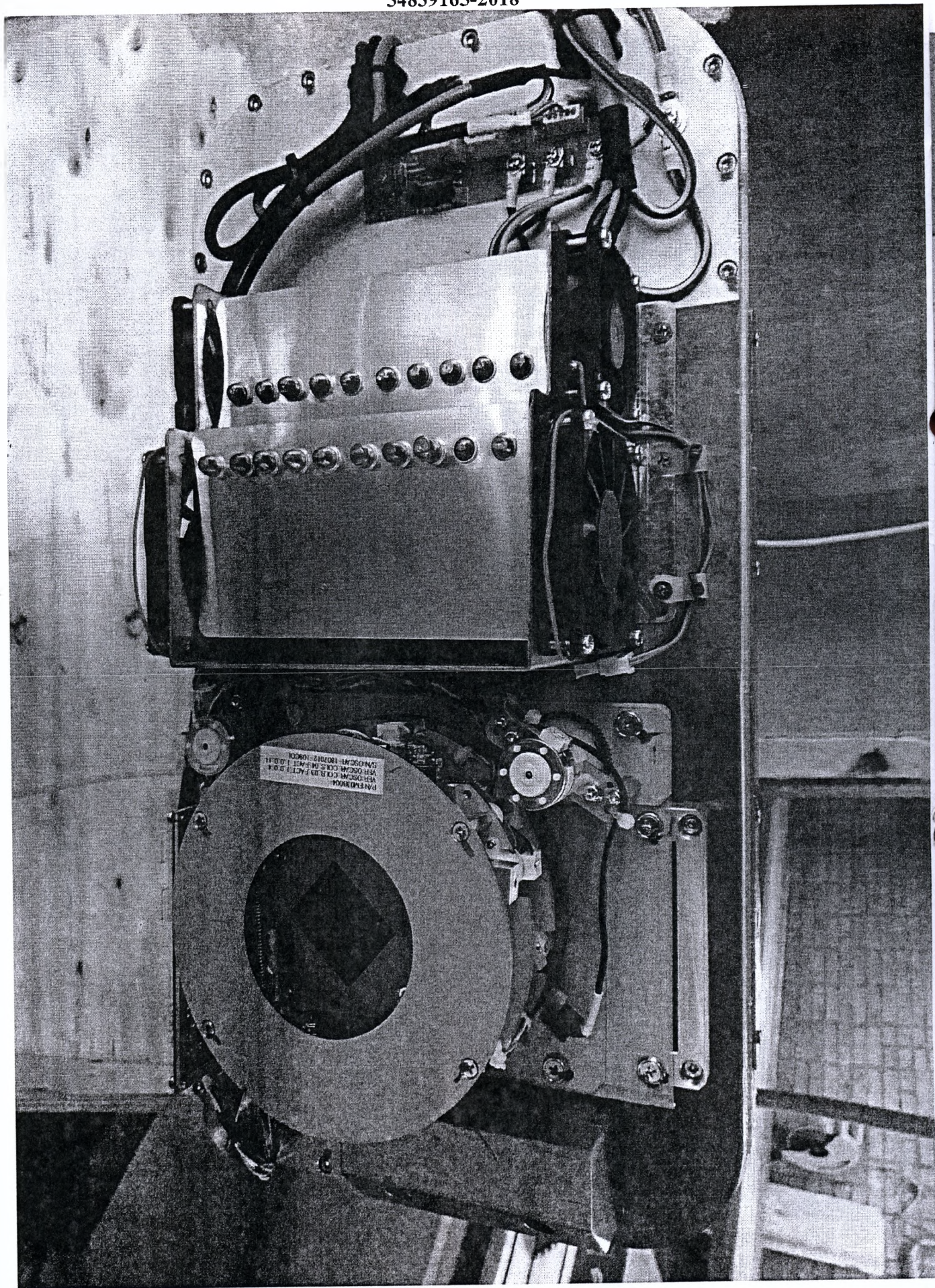


Рисунок 5



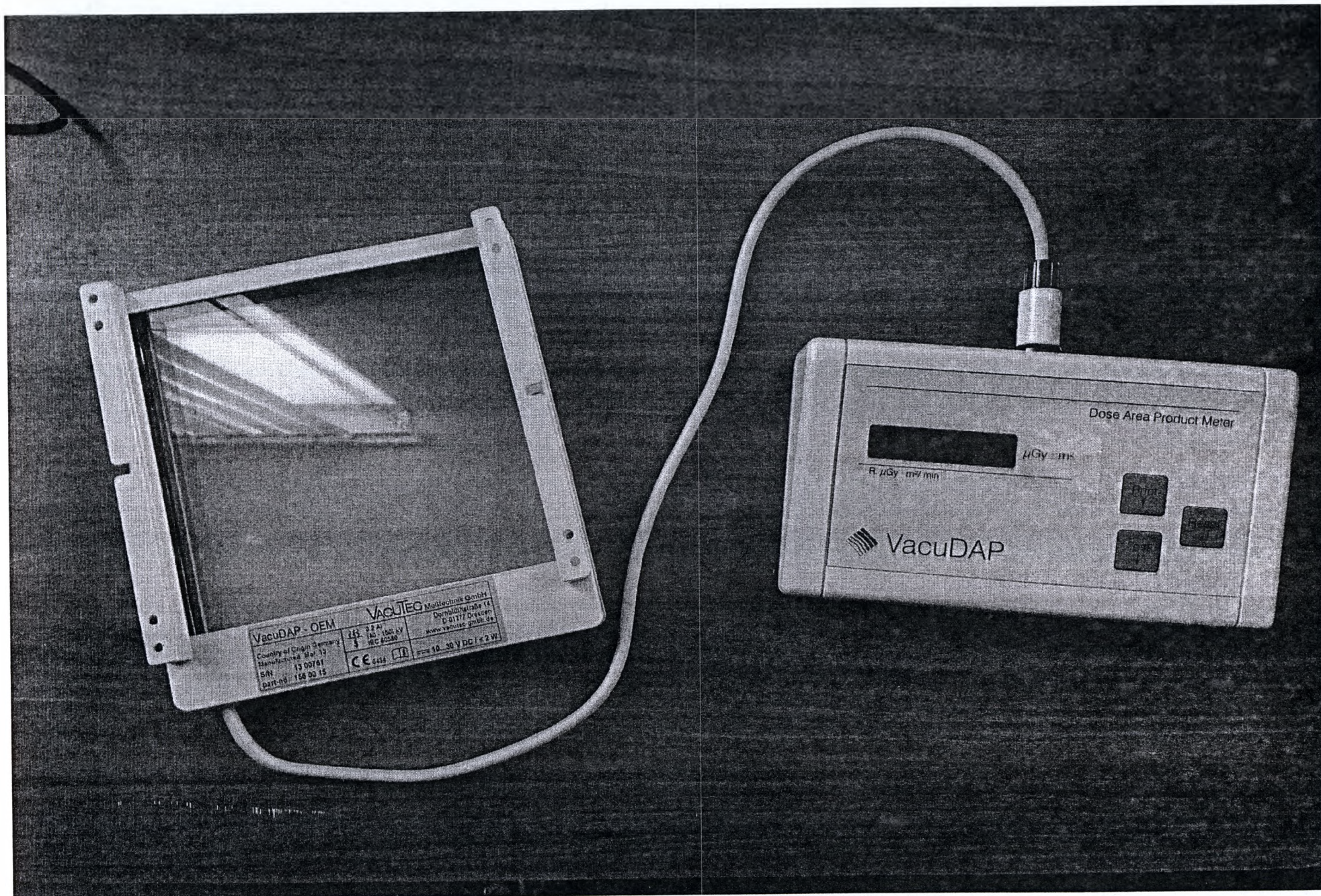


Рисунок 6

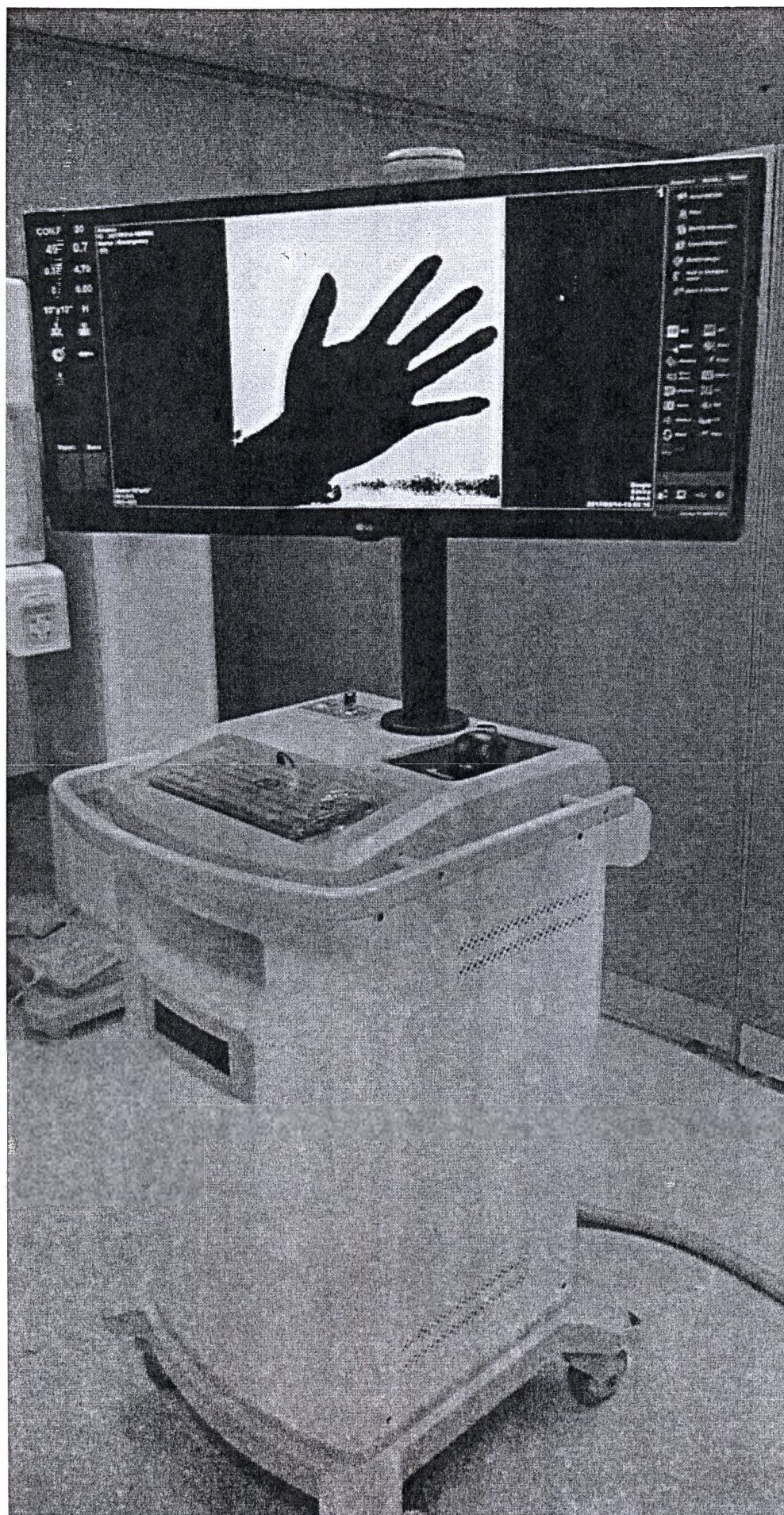


Рисунок 7

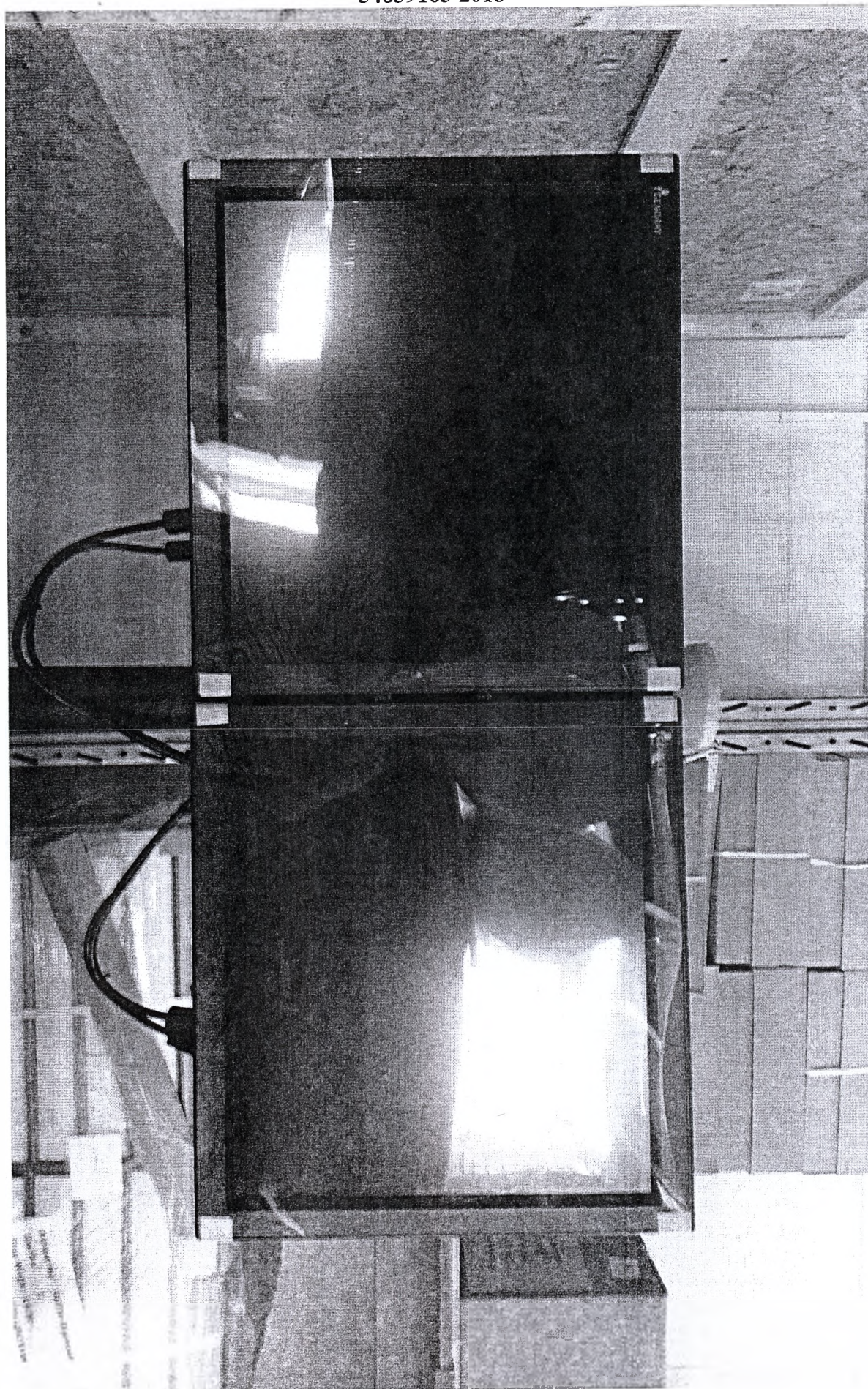


Рисунок 8

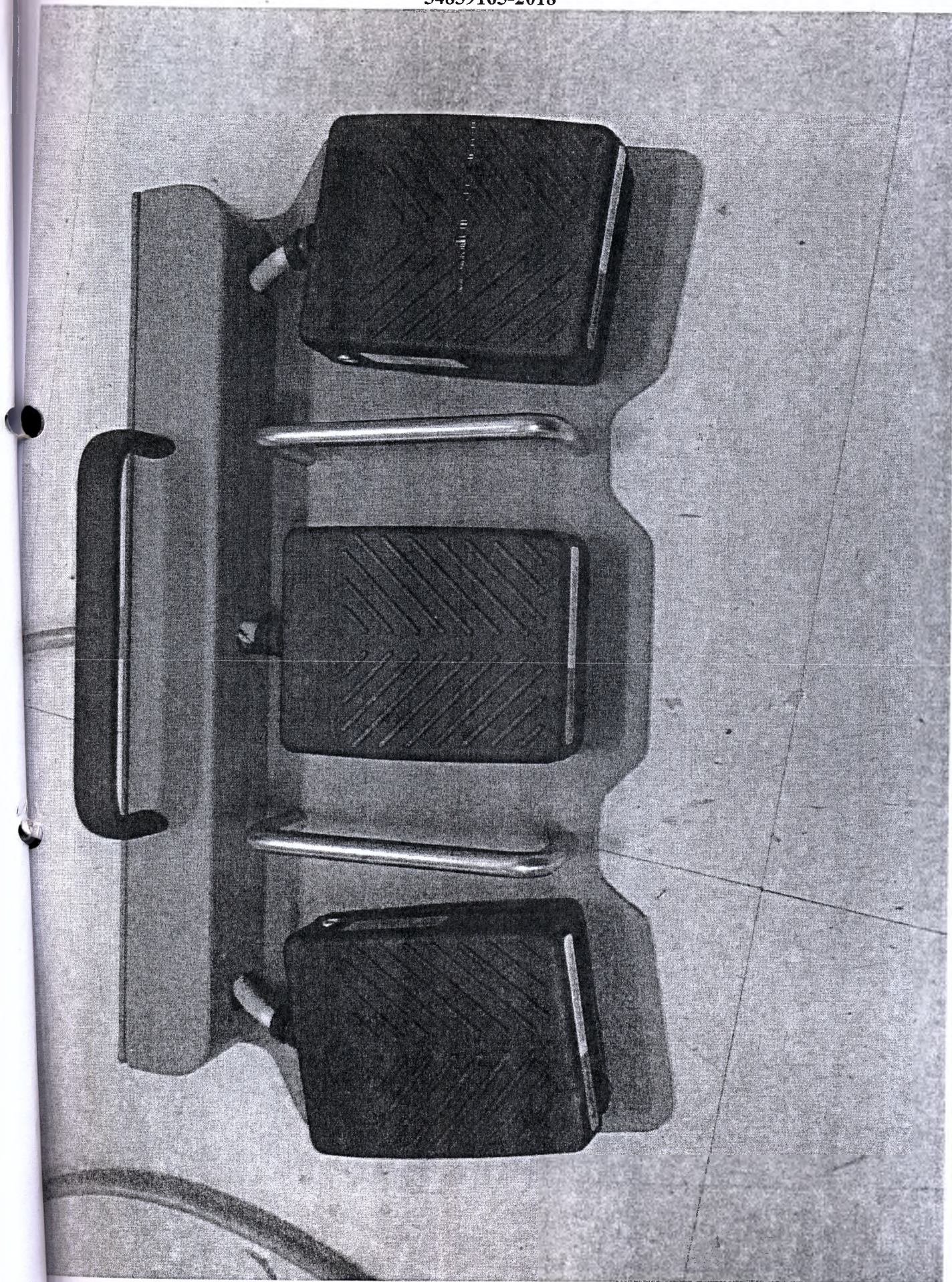


Рисунок 9

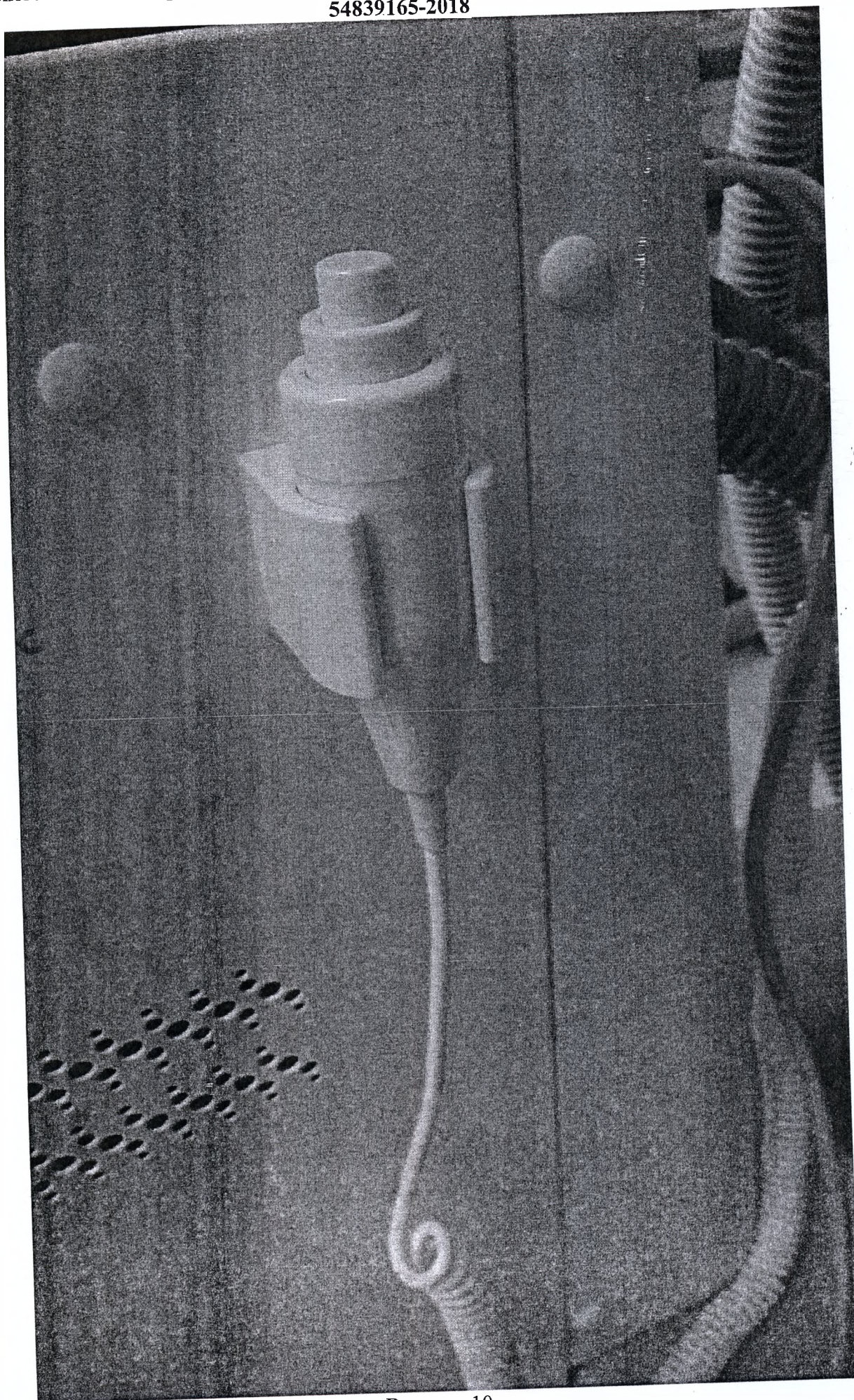


Рисунок 10

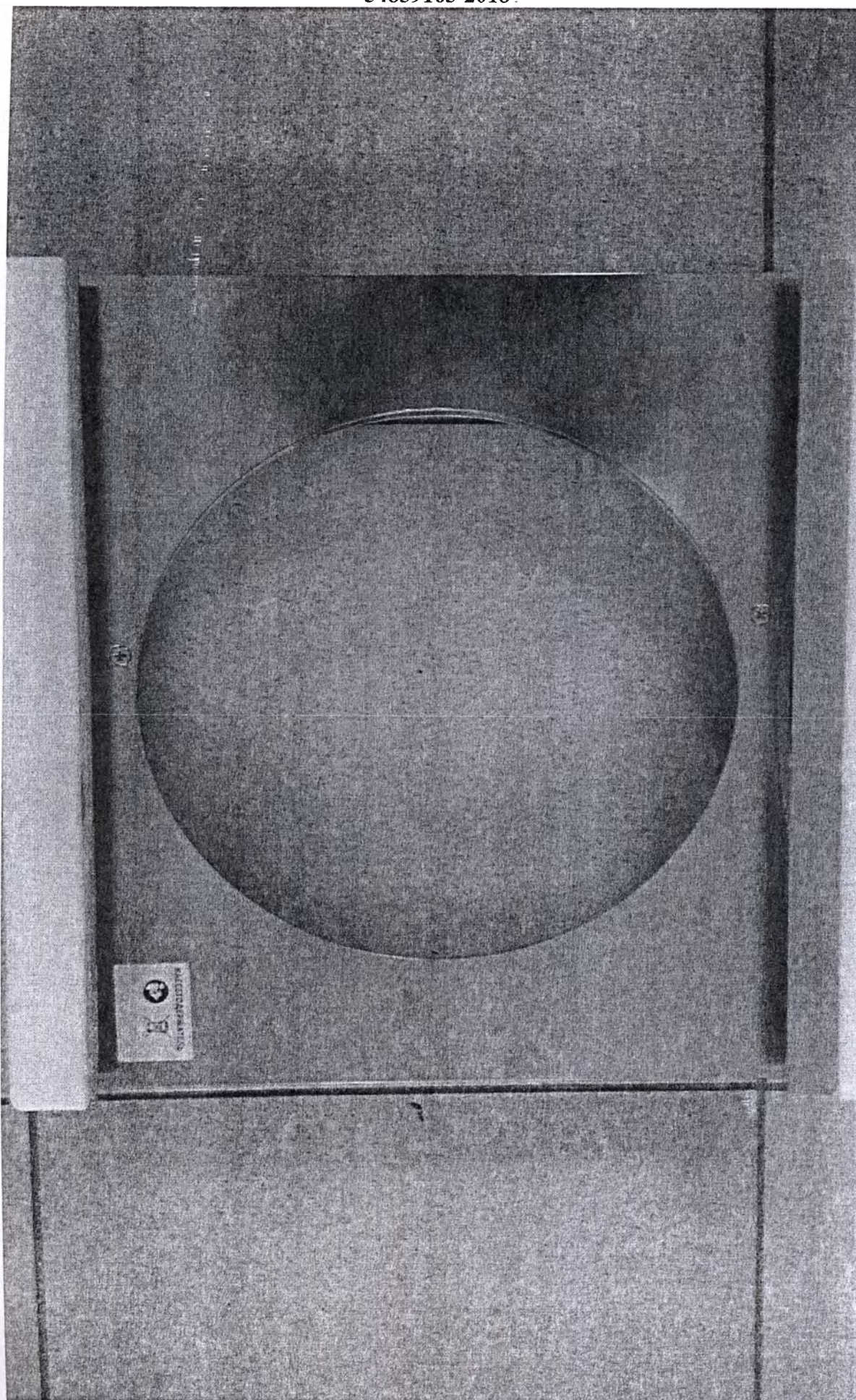


Рисунок 11



Рисунок 12

Рентгеновский аппарат для интервенционных процедур "РЕНЕКС" по ТУ 26.60.11-045-54839165-2018

Рентгеновский аппарат для интервенционных процедур «РЕНЕКС», по ТУ 26.60.11-045-54839165-2018, в исполнениях

Паспорт

ЛЖКМ.26.60.11.045.001 ПС

2018г.

Рисунок 13


**Рентгеновский аппарат для интервенционных процедур
«РЕНЕКС» по ТУ 26.60.11-045-54839165-2018, в исполнениях**

**Руководство по эксплуатации
ЛЖКМ.26.60.11.045.001 РЭ**

2018 г.


Рентгеновский аппарат для интервенционных процедур "РЕНЕКС"
по ТУ 26.60.11-045-54839165-2018, в исполнениях/Руководство по эксплуатации

Руководство оператора автоматизированного рабочего
места врача ЛЖКМ.943129.045.000 РЭ

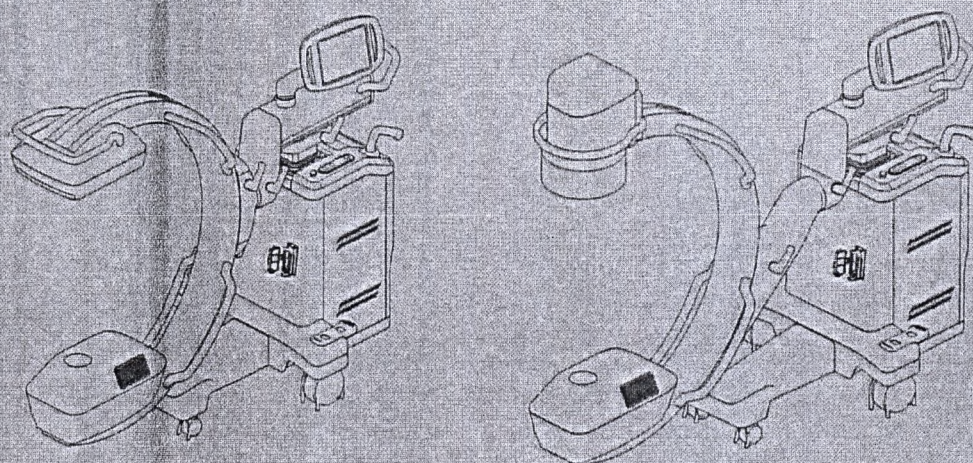

«Рентгеновский аппарат для интервенционных процедур
«РЕНЕКС», по ТУ 26.60.11-045-54839165-2018, в
исполнениях» .Руководство по монтажу

ЛЖКМ.26.60.11.045.000 РМ

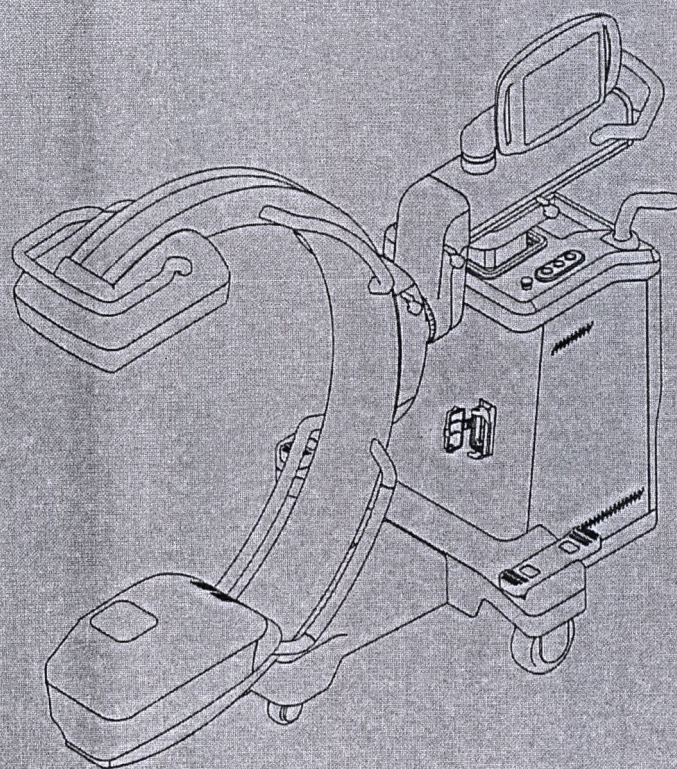

ЛЖКМ.26.60.11.045.000 КР

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Включение С-дуги и начало эксплуатации


1) Выключатель питания (расположен на мобильной тумбе)



Выключатель питания

Выключатель питания расположен сверху на мобильной тумбе. При нажатии на выключатель питания начинается процесс самодиагностики в течение нескольких секунд после нажатия.

Кнопка аварийного отключения

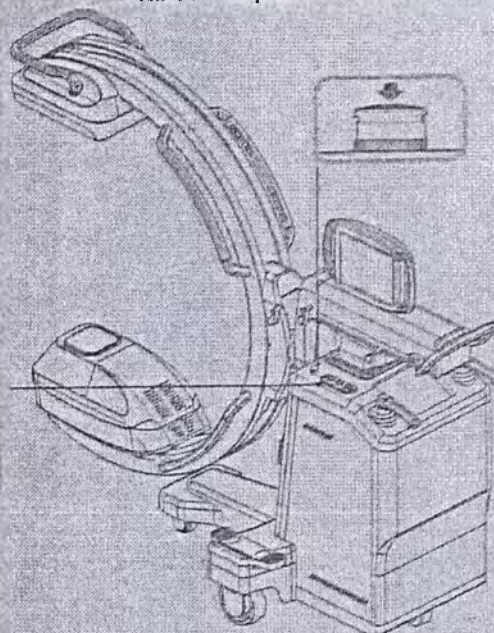

2) Кнопки перемещения штатива С-дуги вверх и вниз, кнопка включения рентгеновского излучения.

3) Как включить С-дугу?

Проверьте наличие соединения кабеля С-дуги с мобильной тумбой.

Включите кабель питания мобильной тумбы в розетку с соответствующими характеристиками.

Нажмите кнопку «ВКЛ»  и удерживайте ее в течение 1 секунды.

4) Управление вертикальным перемещением и включение рентгеновской экспозиции

Кнопками UP и DOWN («ВВЕРХ» и «ВНИЗ») можно задать требуемую высоту штатива С-дуги. Предусмотрена возможность включения рентгеновского излучения с помощью ножного переключателя, ручного переключателя или кнопки включения рентгеновского излучения.



АВАРИЙНОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ

5) Аварийный выключатель

В случае нештатной работы С-дуги или если она не реагирует на управляющие команды, можно прекратить работу путем нажатия на КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ. Этой кнопкой отключается все питание С-дуги и деактивируются все его функции. При нажатом аварийном выключателе на панели управления С-дуги отображается сообщение об «аварийном» отключении. Для выхода из режима аварийного отключения нажмите и поверните его по часовой стрелке, пока он не выключится.

Рентгеновский аппарат для интервенционных процедур "РЕНЕКС" по ТУ 26.60.11-045-54839165-2018

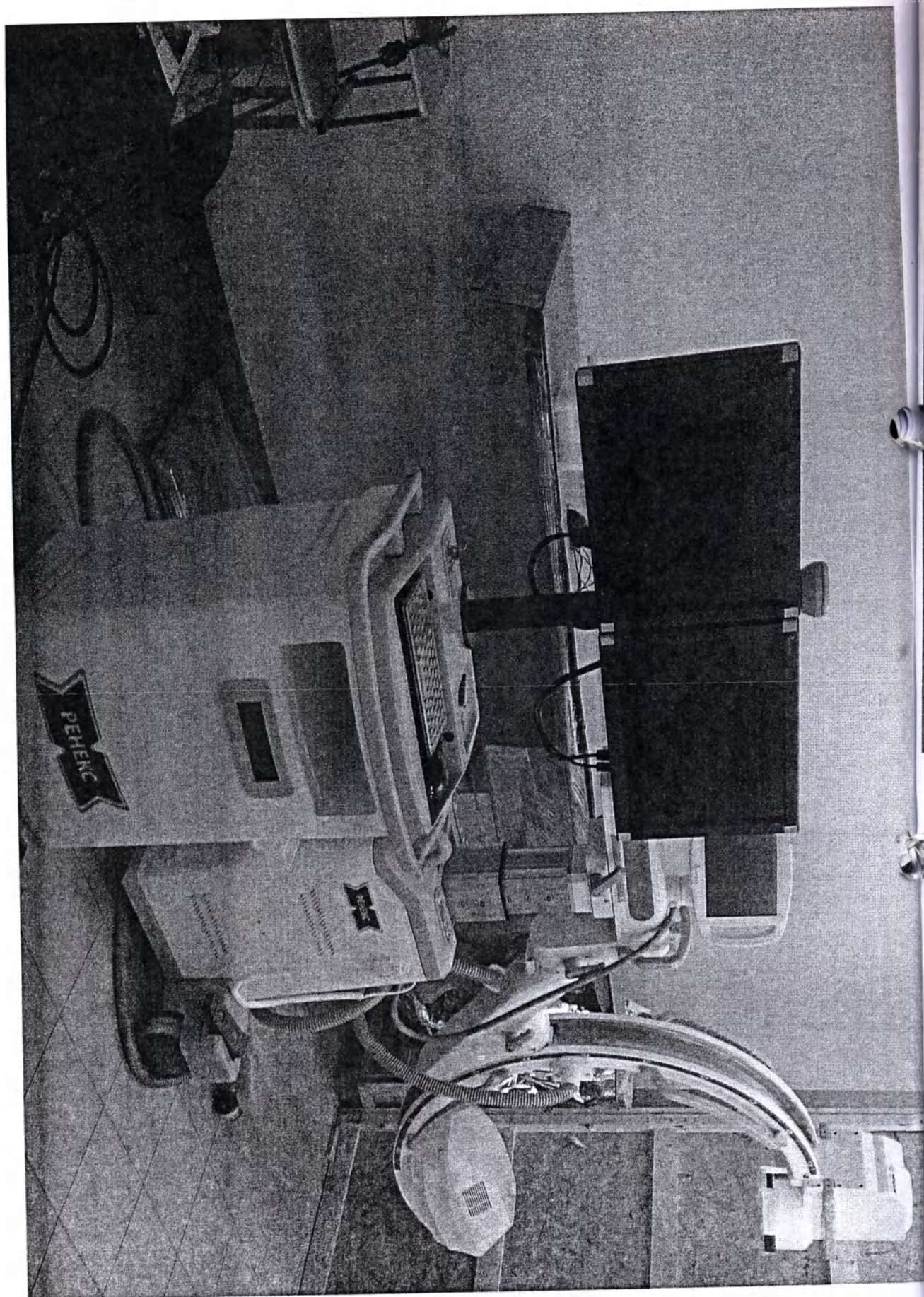


Рисунок 18

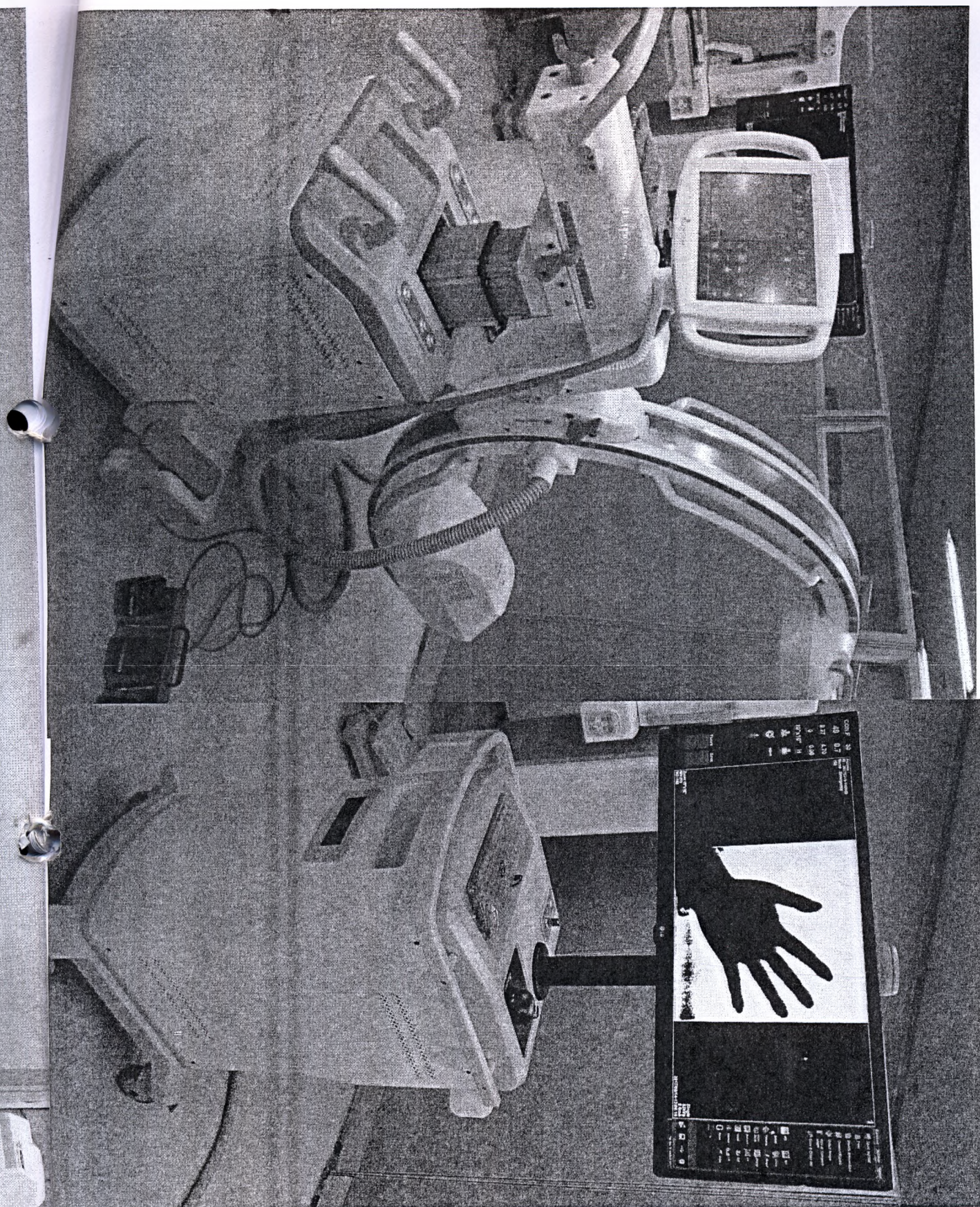


Рисунок 19.

В данном документе
пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью всего 12 листов
Генеральный директор
ООО "С.П.ГЕЛПИК"
Самойлов А.Б.



[Handwritten signature in blue ink]