

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «БиоХолд»
Радюшкин И.В.
«15» ИЮЛЯ 2024 г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
(«Агар Эндо»)
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия
ООО «БиоХолд»,

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

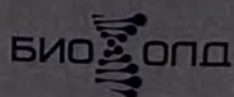


Реагент для бактериологических
исследований
**«Питательная среда для выделения
энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»**


по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТ.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

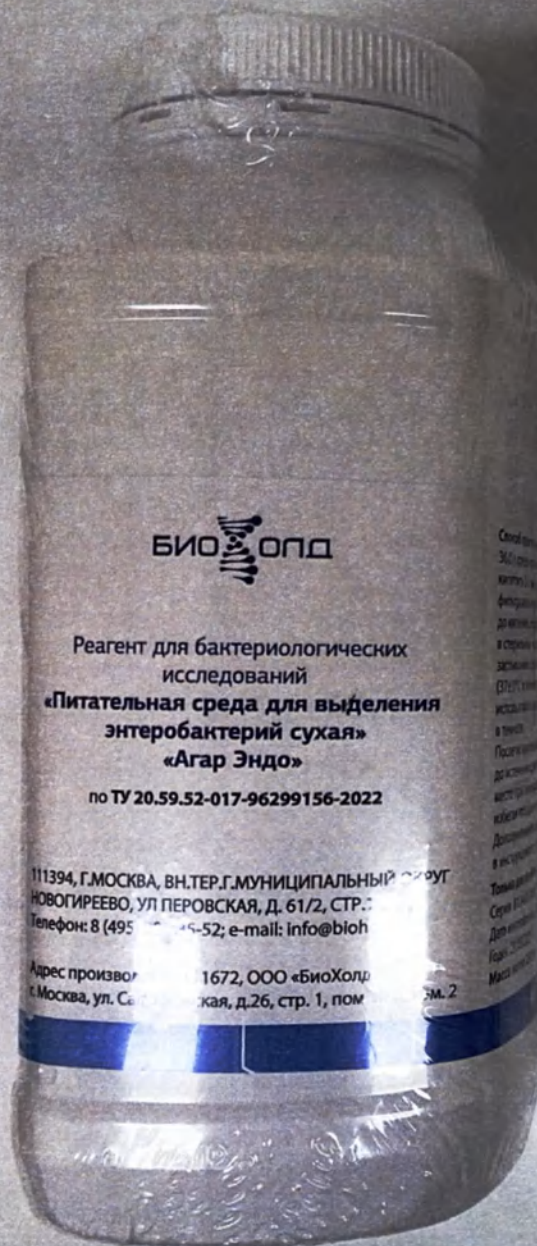

ООО «БиоХолд» 111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1 тел.+7 (495) 280-35-52 e-mail: info@biohold.ru Адрес производства: ООО «БиоХолд», 111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2																																													
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № Реагент для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая» («Агар Эндо») по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022																																													
Вариант №1 РУ № _____	Серия В124/1-10722 Дата изготовления: 21.07.2022 Годен: 20.07.2025																																												
<table border="1"> <tr> <th>Наименование</th> <th>Результаты контроля</th> </tr> <tr> <td>1. Внешний вид</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Реагент</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Технические характеристики</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Прозрачность и цвет</td> <td></td> </tr> <tr> <td>сухих компонент</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Растворимость</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Прозрачность и цвет раствора</td> <td></td> </tr> <tr> <td>рН</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Потеря в массе при высушивании, %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Аммоний азот, %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Хлориды (в пересчете на хлорид), %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Прочность студня</td> <td></td> </tr> </table>	Наименование	Результаты контроля	1. Внешний вид		Реагент		2. Технические характеристики		Прозрачность и цвет		сухих компонент		Растворимость		Прозрачность и цвет раствора		рН		Потеря в массе при высушивании, %		Аммоний азот, %		Хлориды (в пересчете на хлорид), %		Прочность студня		<table border="1"> <tr> <td>взвешивается частями</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ния конкретной</td> <td></td> </tr> <tr> <td>тивания в 1л</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ни должен быть</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	взвешивается частями		ния конкретной		тивания в 1л		ни должен быть											
Наименование	Результаты контроля																																												
1. Внешний вид																																													
Реагент																																													
2. Технические характеристики																																													
Прозрачность и цвет																																													
сухих компонент																																													
Растворимость																																													
Прозрачность и цвет раствора																																													
рН																																													
Потеря в массе при высушивании, %																																													
Аммоний азот, %																																													
Хлориды (в пересчете на хлорид), %																																													
Прочность студня																																													
взвешивается частями																																													
ния конкретной																																													
тивания в 1л																																													
ни должен быть																																													
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Реагент для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая» («Агар Эндо») по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022																																													
1. НАЗНАЧЕНИЕ Назначение. Реагент для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая» («Агар Эндо»), для диагностики in vitro, предназначен для выделения энтеробактерий и неферментирующих грамотрицательных бактерий (НГОБ) и для дифференциации неферментирующих грамотрицательных бактерий (НГОБ) на основе ферментации лактозы при подавлении грамположительных бактерий присутствующих в клинических образцах в качестве вспомогательного средства в диагностике.																																													
1.2. ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ Исследуемые образцы: — материалом для выделения энтеробактерий и для дифференциации (НГОБ) служит посев биоматериала человека (кровь, гной, отделяемое ушей, носа, ран, глаз, экссудат плевральной полости, кал, промывные воды желудка, рвотные массы, выделения из цервикального канала у женщин, моча). Применение медицинского изделия не зависит от популяционных и демографических аспектов. Для диагностики in vitro.																																													
1.3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ Теоретическое обоснование. Острые кишечные инфекции (ОКИ) — один из самых распространенных видов патологии человека, которые могут вызывать различные представители мира микробов — бактерии, грибы, вирусы, простейшие. Для роста																																													

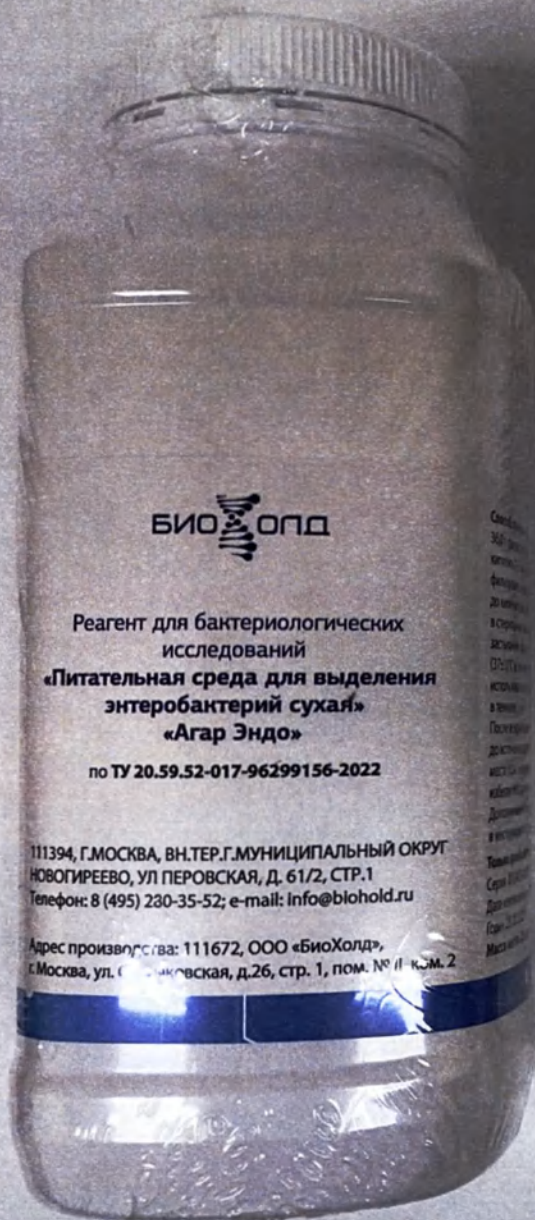

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 230-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
(«Агар Эндо»)
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022
Вариант №2
Серия В124/2-10822
Дата изготовления: 30.08.2022
Годен: 29.08.2025
РУ №

Наименование показателя	Результаты контроля
1. Внешний вид	
Реагент	
2. Технические характеристики	
Прозрачность и цветность сухих компонентов	частным
Растворимость	инкретной
Прозрачность и цветность раствора	ни в 1л
pH	жен быть
Потеря в массе при высушивании, %	
Аминный азот, %	
Хлориды (в пересчете на натрий хлорид), %	
Прочность упаковки	

БИО ОПД
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
(«Агар Эндо»)
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение. Реагент для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая» («Агар Эндо»), для диагностики *in vitro*, предназначен для выделения энтеробактерий и неферментирующих грамотрицательных бактерий (НГОБ) и для дифференциации неферментирующих грамотрицательных бактерий (НГОБ) на основе ферментации лактозы при подавлении грамположительных бактерий присутствующих в клинических образцах в качестве вспомогательного средства в диагностике.

1.2. ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Исследуемые образцы: — материалом для выделения энтеробактерий и для дифференциации (НГОБ) служат послебиоматериал человека (кровь, гной, отделяемое ушей, носа, раны, глаза, экссудат плевральной полости, кал, промывные воды желудка, рвотные массы, выделения из цервикального канала у женщин, моча). Применение медицинского изделия не зависит от популяционных и демографических аспектов. Для диагностики *in vitro*.

1.3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Теоретическое обоснование. Острые кишечные инфекции (ОКИ) — один из самых распространенных видов патологии человека, которые могут вызывать различные представители мира микробов — бактерии, грибы, вирусы, простейшие. Для ГМЗ

БИО ОЛД

Реагент для бактериологических
исследований
«Питательная среда для выделения
энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»

по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № 1/1, пом. 1



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
(«Агар Эндо»)

по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

Вариант №1

Серия В124/1-10722

РУ №

Дата изготовления: 21.07.2022

Годен: 20.07.2025

Наименование

1. Внешний вид
Реагент
2. Технические х
Прозрачность и
сухих компонент
Растворимость

Прозрачность и
раствора
рН
Потеря в массе при
высушивании, %
Аммонийный азот, %
Хлориды (в пересчете
натрия хлорид), %
Прочность студии

Результаты
контроля



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ


Назначение. Реагент для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая» («Агар Эндо»), для диагностики in vitro, предназначен для выделения энтеробактерий и неферментирующих грамотрицательных бактерий (НГОБ) и для дифференциации неферментирующую грамотрицательных бактерий (НГОБ) на основе ферментации лактозы при подавлении грамположительных бактерий присутствующих в клинических образцах в качестве вспомогательного средства в диагностике.

1.2. ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Исследуемые образцы: – материалом для выделения энтеробактерий и для дифференциации (НГОБ) служит посев биоматериала человека (кровь, гной, отделяемое ушей, носа, ран, глаз, экссудат плевральной полости, кал, промывные воды желудка, рвотные массы, выделения из цервикального канала у женщин, моча). Применение медицинского изделия не зависит от популяционных и демографических аспектов. Для диагностики in vitro.

1.3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Теоретическое обоснование. Острые кишечные инфекции (ОКИ) – один из самых распространенных видов патологии человека, которые могут вызывать различные представители мира микробов – бактерии, грибы, вирусы, простейшие. Для ОКИ характерны...

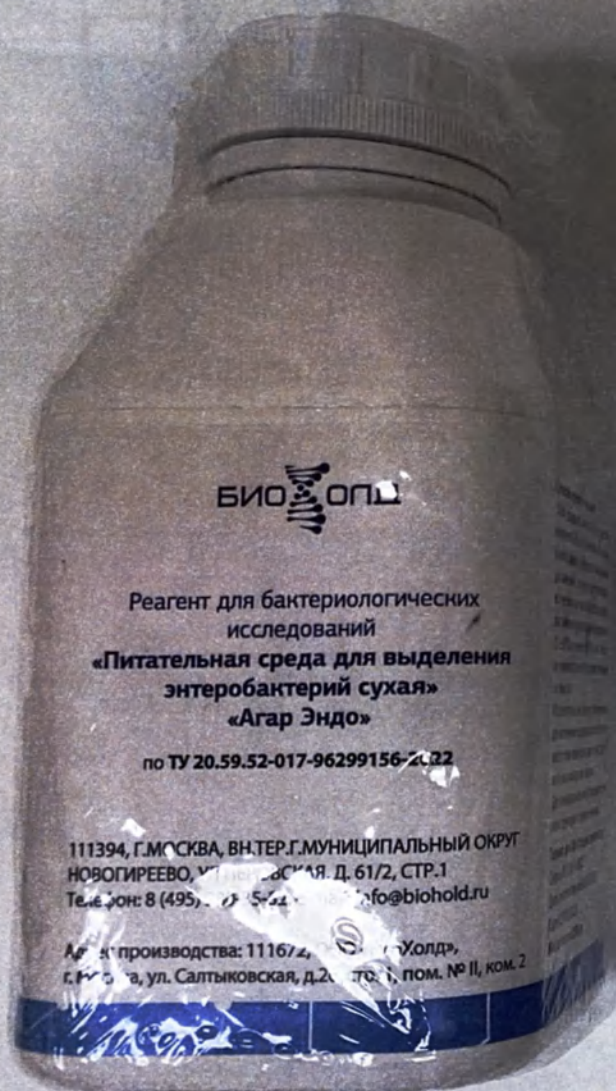

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
(«Агар Эндо»)

по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

Вариант №2

Серия В124/2-10822

РУ №

Дата изготовления: 30.08.2022

Годен: 29.08.2025

Наименование показателей
1. Внешний вид
Реагент
2. Технические характеристики
Прозрачность и цветность
сухих компонентов
Растворимость
Прозрачность и цветность раствора
pH
Потеря в массе при высушивании, %
Аминый азот, %
Хлориды (в пересчете на натрий хлорид), %
Прочность упаковки



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
(«Агар Эндо»)
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение. Реагент для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая» («Агар Эндо»), для диагностики in vitro, предназначен для выделения энтеробактерий и неферментирующих грамотрицательных бактерий (НГОБ) и для дифференциации неферментирующей грамотрицательных бактерий (НГОБ) на основе ферментации лактозы при подавлении грамположительных бактерий присутствующих в клинических образцах в качестве вспомогательного средства в диагностике.

1.2. ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Исследуемые образцы: — материалом для выделения энтеробактерий и для дифференциации (НГОБ) служит посев биоматериала человека (кровь, гной, отделяемое ушей, носа, раны, глаз, экссудат плевральной полости, кал, промывные воды желудка, рвотные массы, выделения из цервикального канала у женщин, моча). Применение медицинского изделия не зависит от популяционных и демографических аспектов. Для диагностики in vitro.

1.3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Теоретическое обоснование. Острые кишечные инфекции (ОКИ) — один из самых распространенных видов патологии человека, которые могут вызывать различные представители мира микробов — бактерии, грибы, вирусы, простейшие. Для ОКИ характерны...

Результаты контроля
частицы
икретиной
ни в 12
жен быть

Прошито, пронумеровано
(7 лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

И.В. Радюшкин



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»



Радюшкин И.В.

« 21 »

2024 г.

**ПРОЕКТ ЭТИКЕТКИ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
(«Агар Эндо»)
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия

ООО «БиоХолд»,

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1



ООО «БиоХолд»

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

тел.+7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд», Россия, 111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1,
пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

Вариант 2 по 250 г в составе:

- Пептон сухой ферментативный.
- Дрожжевой экстракт
- Натрий хлористый
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрия сульфит безводный
- Натрий фосфоринокислый двузамещенный 12-водный
- Фуксин основной
- Агар микробиологический
- Инструкция по применению.
- Паспорт качества.

pH 7,2 - 7,6

РУ _____

серия № _____

дата изготовления _____

срок годности _____

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°C

Для профессионального использования

Только для in vitro диагностики

Дополнительная информация в инструкции по применению

Масса нетто 250 г

Способ приготовления

36,0 г среды размешать в 1 л дистиллированной воды, кипятить 2-3 мин до полного расплавления агара, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, снова довести до кипения, охладить до температуры 45-50°C и разлить в стерильные чашки Петри слоем 5-6 мм. После застывания среды чашки подсушить при температуре (37±1)°C в течение 40-60 мин.

Готовую среду необходимо использовать в день приготовления.

Хранить до посева в темноте.

После вскрытия банки с Реагентом хранят до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом месте при температуре от +2° до +30°C, избегая попадания влаги.

LOT

1



ООО «БиоХолд»

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

тел.+7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд», Россия, 111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1,
пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

Вариант 2 по 250 г в составе:

- Пептон сухой ферментативный.
- Дрожжевой экстракт
- Натрий хлористый
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрия сульфит безводный
- Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный
- Фуксин основной
- Агар микробиологический
- Инструкция по применению.
- Паспорт качества.

РУ _____

серия № _____

дата изготовления _____

срок годности _____

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°C

Для профессионального использования

Только для in vitro диагностики

Дополнительная информация в инструкции по применению

Масса нетто 250 г

Способ приготовления

36,0 г среды размешать в 1 л дистиллированной воды, кипятить 2-3 мин до полного расплавления агара, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, снова довести до кипения, охладить до температуры 45-50°C и разлить в стерильные чашки Петри слоем 5-6 мм. После застывания среды чашки подсушить при температуре (37±1)°C в течение 40-60 мин.

Готовую среду необходимо использовать в день приготовления.

Хранить до посева в темноте.

После вскрытия банку с Реагентом хранят до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом месте при температуре от +2° до +30°C, избегая попадания влаги.

LOT

2



ООО «БиоХолд»

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

тел.+7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд», Россия, 111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1,
пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»

«Агар Эндо»

по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

Вариант 1 по 250 г в составе:

- Панкреатический гидролизат рыбной муки
- Дрожжевой экстракт
- Натрий хлористый
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрия сульфит безводный
- Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный
- Фуксин основной
- Агар микробиологический.
- Инструкция по применению.
- Паспорт качества.

pH 7,2 - 7,6

РУ _____

серия № _____

дата изготовления _____

срок годности _____

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°C

Для профессионального использования

Только для in vitro диагностики

Дополнительная информация в инструкции по применению

Масса нетто 250 г

Способ приготовления

36,0 г среды размешать в 1 л дистиллированной воды, кипятить 2-3 мин до полного расплавления агара, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, снова довести до кипения, охладить до температуры 45-50°C и разлить в стерильные чашки Петри слоем 5-6 мм. После застывания среды чашки подсушить при температуре (37±1)°C в течение 40-60 мин.

Готовую среду необходимо использовать в день приготовления.

Хранить до посева в темноте.

После вскрытия банку с Реагентом хранят до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом месте при температуре от +2° до +30°C, избегая попадания влаги.

LOT

1



ООО «БиоХолд»

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

тел.+7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд», Россия, 111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1,
пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

Вариант 1 по 250 г в составе:

- Панкреатический гидролизат рыбной муки
- Дрожжевой экстракт
- Натрий хлористый
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрия сульфит безводный
- Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный
- Фуксин основной
- Агар микробиологический.
- Инструкция по применению.
- Паспорт качества.

pH 7,2 - 7,6

РУ _____

серия № _____

дата изготовления _____

срок годности _____

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°C

Для профессионального использования

Только для in vitro диагностики

Дополнительная информация в инструкции по применению

Масса нетто 250 г

Способ приготовления

36,0 г среды размещать в 1 л дистиллированной воды, кипятить 2-3 мин до полного расплавления агара, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, снова довести до кипения, охладить до температуры 45-50°C и разлить в стерильные чашки Петри слоем 5-6 мм. После застывания среды чашки подсушить при температуре (37±1)°C в течение 40-60 мин.

Готовую среду необходимо использовать в день приготовления.

Хранить до посева в темноте.

LOT

2

Прошито, пронумеровано
(5 лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор ООО
«БиоХолд»



И.В. Радюшкин

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

И.В. Радюшкин
«15» 09 2024 г.

**МАКЕТ РАЗВЕРТКИ ЭТИКЕТКИ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
(«Агар Эндо»)
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия
ООО «БиоХолд»,

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

Вариант 1 по 250 г в составе:

- Панкреатический гидролизат рыбной муки
- Дрожжевой экстракт
- Натрий хлористый
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрия сульфит безводный
- Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный
- Фуксин основной
- Агар микробиологический
- Инструкция по применению
- Паспорт качества

pH 7,2-7,6

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°С.

РУ №



Реагент для бактериологических исследований
**«Питательная среда для выделения
энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»**

по **ТУ 20.59.52-017-96299156-2022**

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

36,0 г среды размешать в 1 л дистиллированной воды, кипятить 2-3 мин до полного расплавления агара, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, снова довести до кипения, охладить до температуры 45-50°С и разлить в стерильные чашки Петри слоем 5-6 мм. После застывания среды чашки подсушить при температуре (37±1)°С в течение 40-60 мин. Готовую среду необходимо использовать в день приготовления. Хранить до посева в темноте.

После вскрытия банку с Реагентом хранят до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом месте при температуре от +2° до +30°С, избегая попадания влаги.

Дополнительная информация приведена в инструкции по применению.

LOT

1

Только для in vitro диагностики

Серия B124/1-10722

Дата изготовления 21.07.2022

Годен 20.07.2025

Масса нетто 250 гр.

Вариант 2 по 250 г в составе:

- Пептон сухой ферментативный
- Дрожжевой экстракт
- Натрий хлористый
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрия сульфит безводный
- Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный
- Фуксин основной
- Агар микробиологический
- Инструкция по применению
- Паспорт качества

pH 7,2-7,6

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°C.

РУ №



Реагент для бактериологических исследований
**«Питательная среда для выделения
энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»**

по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

36,0 г среды размешать в 1 л дистиллированной воды, кипятить 2-3 мин до полного расплавления агара, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, снова довести до кипения, охладить до температуры 45-50°C и разлить в стерильные чашки Петри слоем 5-6 мм. После застывания среды чашки подсушить при температуре (37±1)°C в течение 40-60 мин. Готовую среду необходимо использовать в день приготовления. Хранить до посева в темноте.

После вскрытия банку с Реагентом хранят до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом месте при температуре от +2° до +30° C, избегая попадания влаги.

Дополнительная информация приведена в инструкции по применению.

LOT

1

Только для in vitro диагностики

Серия В124/2-10822

Дата изготовления 30.08.2022

Годен 29.08.2025

Масса нетто 250 гр.

Вариант 1 по 250 г в составе:

- Панкреатический гидролизат рыбной муки
- Дрожжевой экстракт
- Натрий хлористый
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрия сульфит безводный
- Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный
- Фуксин основной
- Агар микробиологический
- Инструкция по применению
- Паспорт качества

pH 7,2-7,6

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°C.

РУ №



Реагент для бактериологических исследований
**«Питательная среда для выделения
энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»**

по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

36,0 г среды размешать в 1 л дистиллированной воды, кипятить 2-3 мин до полного расплавления агара, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, снова довести до кипения, охладить до температуры 45-50°C и разлить в стерильные чашки Петри слоем 5-6 мм. После застывания среды чашки подсушить при температуре (37±1)°C в течение 40-60 мин. Готовую среду необходимо использовать в день приготовления. Хранить до посева в темноте.

После вскрытия банку с Реагентом хранят до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом месте при температуре от +2° до +30° C, избегая попадания влаги.

Дополнительная информация приведена в инструкции по применению.

LOT

2

Только для in vitro диагностики

Серия B124/1-10722

Дата изготовления 21.07.2022

Годен 20.07.2025

Масса нетто 250 гр.

Вариант 2 по 250 г в составе:

- Пептон сухой ферментативный
- Дрожжевой экстракт
- Натрий хлористый
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрия сульфит безводный
- Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный
- Фуксин основной
- Агар микробиологический
- Инструкция по применению
- Паспорт качества

pH 7,2-7,6

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°С.

РУ №



Реагент для бактериологических исследований
**«Питательная среда для выделения
энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»**

по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

36,0 г среды размешать в 1 л дистиллированной воды, кипятить 2-3 мин до полного расплавления агара, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, снова довести до кипения, охладить до температуры 45-50°С и разлить в стерильные чашки Петри слоем 5-6 мм. После застывания среды чашки подсушить при температуре (37±1)°С в течение 40-60 мин. Готовую среду необходимо использовать в день приготовления. Хранить до посева в темноте.

После вскрытия банку с Реагентом хранят до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом месте при температуре от +2° до +30° С, избегая попадания влаги.

Дополнительная информация приведена в инструкции по применению.

LOT
2

Только для in vitro диагностики

Серия B124/2-10822

Дата изготовления 30.08.2022

Годен 29.08.2025

Масса нетто 250 гр.

Вариант 1 по 250 г в составе:

- Панкреатический гидролизат рыбной муки
- Дрожжевой экстракт
- Натрий хлористый
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрия сульфит безводный
- Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный
- Фуксин основной
- Агар микробиологический
- Инструкция по применению
- Паспорт качества

pH 7,2-7,6

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°C

РУ №



Реагент для бактериологических исследований
**«Питательная среда для выделения
энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»**

по **ТУ 20.59.52-017-96299156-2022**

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

среды размешать в 1 л дистиллированной воды, кипятить 2-3 мин до полного расплавления агара, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, снова довести до кипения, охладить до температуры 45-50°C и разлить в стерильные чашки Петри слоем 5-6 мм. После застывания среды чашки подсушить при температуре (37±1)°C в течение 40-60 мин. Готовую среду необходимо использовать в день приготовления. Хранить до посева в темноте.

После вскрытия банку с Реагентом хранят до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом месте при температуре от +2° до +30° C, избегая попадания влаги.

Дополнительная информация приведена в инструкции по применению.

LOT

Только для in vitro диагностики

Серия

Дата изготовления

Годен

Масса нетто 250 гр.

Вариант 2 по 250 г в составе:

- Пептон сухой ферментативный
- Дрожжевой экстракт
- Натрий хлористый
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрия сульфит безводный
- Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный
- Фуксин основной
- Агар микробиологический
- Инструкция по применению
- Паспорт качества

pH 7,2-7,6

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°C

РУ №



Реагент для бактериологических исследований
**«Питательная среда для выделения
энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»**

по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

среды размешать в 1 л дистиллированной воды, кипятить 2-3 мин до полного расплавления агара, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, снова довести до кипения, охладить до температуры 45-50°C и разлить в стерильные чашки Петри слоем 5-6 мм. После застывания среды чашки подсушить при температуре (37±1)°C в течение 40-60 мин. Готовую среду необходимо использовать в день приготовления. Хранить до посева в темноте.

После вскрытия банку с Реагентом хранят до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом месте при температуре от +2° до +30° C, избегая попадания влаги.

Дополнительная информация приведена в инструкции по применению.

LOT

Только для in vitro диагностики

Серия

Дата изготовления

Годеи

Масса нетто 250 гр.

Прошито, пронумеровано
(4 лист (ов)),
скреплено печатью



Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

И.В. Радюшкин

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

 Радюшкин И.В.
«22» _____ 2024 г.

**ПРОЕКТ ЭТИКЕТКИ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
(«Агар Эндо»)
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия

ООО «БиоХолд»,

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Саптыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022**

серия № В124/1-10722

срок годности 20.07.2025 дата изготовления 21.07.2022

количество 8

масса нетто 2,48 кг масса брутто 2,68 кг



IVD



LOT 1

Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Саптыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022**

серия № В124/2-10822

срок годности 29.08.2025 дата изготовления 30.08.2022

количество 8

масса нетто 2,48 кг масса брутто 2,68 кг



IVD



LOT 1

Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@bichold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022**

серия № В124/1-10722

срок годности 20.07.2025 дата изготовления 21.07.2022

количество 8

масса нетто 2,56 кг масса брутто 2,72 кг



Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@bichold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022**

серия № В124/2-10822

срок годности 29.08.2025 дата изготовления 30.08.2022

количество 8

масса нетто 2,56 кг масса брутто 2,72 кг



Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С

Прочито, пронумеровано
(2) лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

И.В. Радюшкин



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «БиоХолд»



**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
(«Агар Эндо»)
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия
ООО «БиоХолд»,

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

ООО «БиоХолд»
111394, Г. МОСКВА, ВНТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

серия № В124/1-10722


срок годности 20.07.2025 дата изготовления 21.07.2022

количество 8

масса нетто 2,48 кг масса брутто 2,68 кг




Хранить при температуре от +2 °C до +30 °C
Транспортировать при температуре от +2 °C до +30 °C

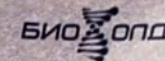

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

111394, Г. МОСКВА, ВНТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд», г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

ООО «БиоХолд»
111394, Г. МОСКВА, ВНТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

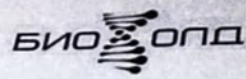

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение. Реагент для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая» («Агар Эндо»), для диагностики in vitro, предназначен для выделения энтеробактерий и неферментирующих грамотрицательных бактерий и для дифференциации неферментирующих грамотрицательных бактерий (НГОБ) на основе ферментации лактозы при появлении глюкоположительных бактерий.

Вариант №1

РУ-М

Наименование п
1. Внешний вид
Реагент
2. Технические ха
Прозрачность и цве
сухих компонентов
Растворимость

Прозрачность и цвет
раствора
РН
Потери в массе при
высушивании, %
Аммиачный азот, %
Хлориды (в пересче
натрия хлорида), %
Прочность студня, г

10722

21.07.2022

025

Результаты

контроля

тсья частицы

и конкретной

названия в 1л

должен быть

ООО «БиоХолд»
111394, Г. МОСКВА, ВНТ.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР. 1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д. 26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

серия № B124/2-10822

срок годности 29.08.2025 дата изготовления 30.08.2022

количество 8

масса нетто 2,48 кг масса брутто 2,68 кг



Хранить при температуре от +2 °C до +30 °C
Транспортировать при температуре от +2 °C до +30 °C



ООО «БиоХолд»
111394, Г. МОСКВА, ВНТ.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР. 1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д. 26, стр. 1, пом. № II, ком. 2
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

Вариант №2

РУ №

Наименование и
1. Внешний вид
Реагент
2. Технические ха-
Прозрачность и цве-
сухих компонентов
Растворимость


Прозрачность и цвет
раствора

pH

Потеря в массе при
высушивании, %

Аммоний азот, %

Хлориды (в пересчет
натрия хлорида), %

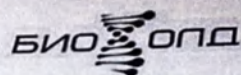

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение. Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая» («Агар
Эндо»), для диагностики in vitro, предназначен для выделения
бактерий и неферментирующих грамотрицательных бактерий
(НГОВ) и для дифференциации неферментирующих
грамотрицательных бактерий (НГОВ) на основе ферментации

Результаты
контроля

таться частицы

в конкретной
кванти в 1л

должен быть

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

количество 8

масса нетто 2,56 кг масса брутто 2,72 кг



IVD



LOT 2

Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С

ООО "БиоХолд"
111384, МОСКВА, ВИНТЕР-МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОСРЕБНО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д.610, СТ.1,
КВ.7 (ЭТД) ООО «БиоХолд»
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Спасская, д.26, этр. I, пом. №11, ком. 2

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий суخالм
(«Агар Эндю»)»
по ТУ 20.59.52-01-796299156-2022

ИЗДАТО 10.07.23

Р.У.М.

Наименование
1. Внешний вид
2. Технические
3. Прозрачность
4. Состав
5. Упаковка

Прозрачность раствора	
pH	
Потеря в массе высушивании	
Аммоний азот,	
Хлориды (в пе- натрия хлорид)	
Прочность сту	

БИО-ОПД

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»

по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

Назначение. Реагент для бактериологических исследований «Липидная среда для выделения энтеробактерий сухая» («Агар Эндо»), для диагностики *in vitro*, предназначен для выделения энтеробактерий и неферментирующих грамотрицательных бактерий (НГОБ) и для дифференциации неферментирующей грамотрицательных бактерий (НГОБ) на основе ферментативной активности при подавлении грамположительных бактерий. Применяется в клинических образцах в качестве вспомогательного средства в диагностике.

124/1-10722
составления: 21.07.2022
07.2025

Результаты контроля	
а	
б	
в	
г	
д	
е	
ж	
з	
и	
к	
л	
м	
н	
о	
п	
р	
с	
т	
у	
ф	
х	
ц	
ч	
ш	
щ	
ы	
я	

БИО-ОПД

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения
энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

111394, Г. МОСКВА, ВНТ. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
НОВОИТРЕЕВО, УЛ. ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТ. 1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohazard.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХард»
Г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. 10

ООО «БиоХолд»
111394, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ. ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР. 1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д. 26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

серия № В124/2-10822

срок годности 29.08.2025 дата изготовления 30.08.2022

количество 8

масса нетто 2,56 кг масса брутто 2,72 кг



Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С



БИОХОЛД

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

111394, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ. ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР. 1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д. 26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

ООО «БиоХолд»
111394, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ. ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР. 1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д. 26, стр. 1, пом. № II, ком. 2
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

БИОХОЛД

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая»
«Агар Эндо»
по ТУ 20.59.52-017-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение. Реагент для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая» («Агар Эндо»), для диагностики in vitro, предназначен для выделения энтеробактерий и неферментирующих грамотрицательных бактерий (НГОБ) и для дифференциации неферментирующих грамотрицательных бактерий (НГОБ) на основе ферментации в присутствии грамположительных бактерий, присутствующих в клинических образцах в качестве вспомогательного средства в диагностике.

1.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ

Вариант №2

Р.У. №

Наименование
1. Внешний
Результат
2. Технический

Прозрачность
раствора
рН
Потеря в массе
высушивания
Аммоний азот
Хлориды (в г)
натрия хлорид

Результаты
контроля

Ожидается частицы
выделения конкретной
реинициации в 1д
частицы должен быть

Прошито, пронумеровано
(5 лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор
«БиоХолд»



Н.В. Радюшкин