



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «Парамед Дистрибьюшн»
Гимадитдинов Ф.Р.
«30» января 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Мочеприемник одноразовый стерильный

Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. («Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.»), Китайская Народная Республика

ФОТОГРАФИИ ОБЩЕГО ВИДА ИЗДЕЛИЯ



Рисунок 1 – Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с винтовым клапаном



Рисунок 2 – Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с Т-образным клапаном



Рисунок 3 - Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с пул-пуш клапаном

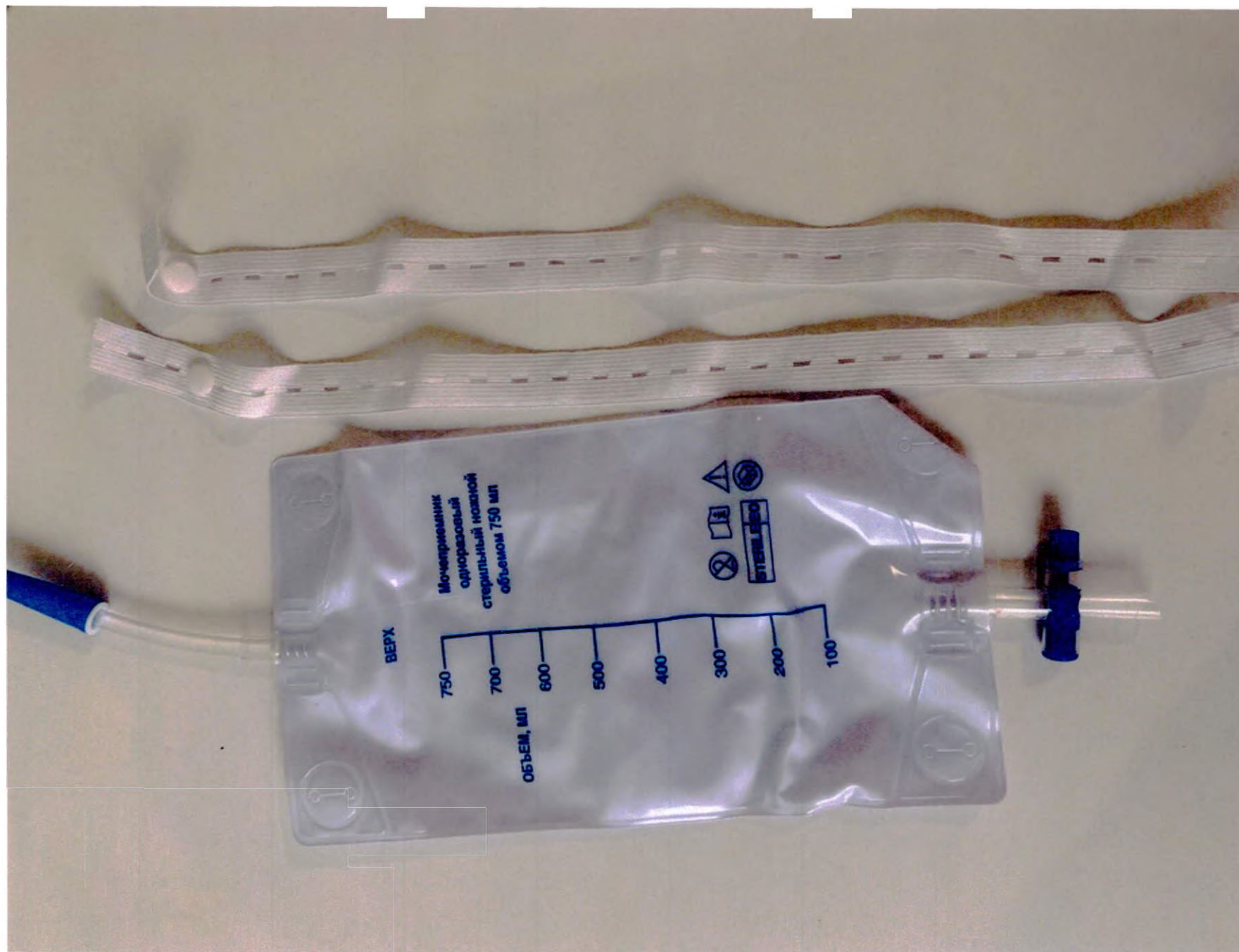


Рисунок 4 - Мочеприемник одноразовый стерильный ножной объемом 750 мл

ФОТОГРАФИИ УПАКОВКИ ИЗДЕЛИЯ

Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с винтовым клапаном

ВНИМАНИЕ:


1. Не использовать изделие в случае повреждения упаковки.
2. Не использовать изделие по окончании срока годности.
3. Не стерилизовать повторно.
4. Изделие предназначено для однократного применения и после использования должно быть утилизировано.
5. Во время использования изделия следить за тем, чтобы мочеприемник располагался ниже уровня мочевого пузыря.

открывать здесь ▶

LOT 20221003

03.10.2022

02.10.2027

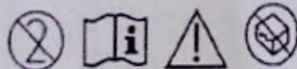

STERILE EO

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

ISO8669-2

ISO13485

Штрих-код



Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. («Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.»).
Адрес: Китайская Народная Республика, 16F-1, Building 1, No. 98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo,
Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Уполномоченный представитель: ООО «Парамед Дистрибьюшн». Адрес: Россия, 620144, Свердловская область,
Г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 249, тел.: +7 (343) 226-14-04.

Рисунок 5 – Общий вид лицевой стороны индивидуальной упаковки




Рисунок 6 – Общий вид оборотной стороны индивидуальной упаковки

Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с винтовым клапаном

ВНИМАНИЕ:

1. Не использовать изделие в случае повреждения упаковки.
2. Не использовать изделие по окончании срока годности.
3. Не стерилизовать повторно.
4. Изделие предназначено для однократного применения и после использования должно быть утилизировано.
5. Во время использования изделия следить за тем, чтобы мочеприемник располагался ниже уровня мочевого пузыря.

LOT 20221003
03.10.2022
02.10.2027

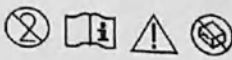

STERILE

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

ISO8669-2

ISO13485



Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. («Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.»).
Адрес: Китайская Народная Республика, 16F-1, Building 1, No. 98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo,
Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Уполномоченный представитель: ООО «Парамед Дистрибушн». Адрес: Россия, 620144, Свердловская область,
Г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 249, тел.: +7 (343) 226-14-04.

Штрих-код

открывать здесь

Рисунок 7 – Общий вид индивидуальной упаковки с инструкцией по применению

Version 2.0 Версия 2.0

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ «МОЧЕПРИЕМНИК ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ»

Регистрационное удостоверение в РФ № _____ от _____

ВНИМАНИЕ: Настоящая инструкция по применению описано медицинское изделие «Мочеприемник одноразовый стерильный» и сведения об использовании его по назначению.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. («Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.»)
Адрес места нахождения: Китайская Народная Республика, 16F-1, Building 1, No. 98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Тел: 86-574-87722170, 86-574-87722170
E-mail: info@china-greetmed.com

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Парамед Дистрибушн» (ООО «Парамед Дистрибушн»)
Адрес места нахождения: Россия, 620144, Свердловская область, Г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 249
Телефон: (343) 226-14-04
E-mail: info@paramed.ru

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Мочеприемник одноразовый стерильный.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки Мочеприемника одноразового стерильного состоит из пакета исполнения:

1. Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с винтовым клапаном (код вида 156370), в составе:
 - 1.1. Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с винтовым клапаном – 1 шт.;
 - 1.2. Инструкция по применению – 1 шт.;
 2. Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с Т-образным клапаном (код вида 156370), в составе:
 - 2.1. Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с Т-образным клапаном – 1 шт.;
 - 2.2. Инструкция по применению – 1 шт.;
 3. Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с пу-пуш клапаном (код вида 156370), в составе:
 - 3.1. Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с пу-пуш клапаном – 1 шт.;
 - 3.2. Инструкция по применению – 1 шт.;
 4. Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 750 мл (код вида 156390), в составе:
 - 4.1. Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 750 мл – 1 шт.;
 - 4.2. Инструкция по применению – 1 шт.;
- ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкция по применению поставляется с каждым изделием в виде отдельного документа (не вкладывается в индивидуальную упаковку).
- Для мочеприемников одного варианта исполнения в количестве двух и более штук допускается вкладывать одну инструкцию по применению.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Мочеприемник одноразовый стерильный (далее – «мочеприемник», «изделие») предназначен для сбора мочи пациента, не способного самостоятельно контролировать процесс мочеиспускания.

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Область применения: Урология, акушерство и гинекология, хирургия.
Условия применения: лечебно-профилактические учреждения, а также домашние условия.

Version 2.0/Версия 2.0

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ «МОЧЕПРИЕМНИК ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ»

Регистрационное удостоверение в РФ № _____ от _____

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей инструкции по применению описано медицинское изделие «Мочеприемник одноразовый стерильный» и сведения об использовании его по назначению.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. («Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.»)

Адрес места нахождения: Китайская Народная Республика, 16F-1, Building 1, No. 98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Телефон: 86-574-87739070, 86-574-87722370

E-mail: info@china-greetmed.com

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Парамед Дистрибьюшн» (ООО «Парамед Дистрибьюшн»)

Адрес места нахождения: Россия, 620144, Свердловская область, Г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 249

Телефон: (343) 226-14-04

E-mail: info@paramd.ru

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Мочеприемник одноразовый стерильный.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки Мочеприемника одноразового стерильного зависит от варианта исполнения:

1. Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с винтовым клапаном (код вида 156370), в составе:

1.1. Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с винтовым клапаном – 1 шт.;

1.2. Инструкция по применению – 1 шт.;

2. Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с Т-образным клапаном (код вида 156370), в составе:

2.1. Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с Т-образным клапаном – 1 шт.;

2.2. Инструкция по применению – 1 шт.;

3. Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с пул-пуш клапаном (код вида 156370), в составе:

3.1. Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с пул-пуш клапаном – 1 шт.;

3.2. Инструкция по применению – 1 шт.;

4. Мочеприемник одноразовый стерильный ножной объемом 750 мл (код вида 156390), в составе:

4.1. Мочеприемник одноразовый стерильный ножной объемом 750 мл – 1 шт.

4.2. Инструкция по применению – 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкция по применению поставляется с каждым изделием в виде отдельного документа (не вкладывается в индивидуальную упаковку).

Для мочеприемников одного варианта исполнения в количестве двух и более штук допускается вкладывать одну инструкцию по применению.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Мочеприемник одноразовый стерильный (далее – «мочеприемник», «изделие») предназначен для сбора выделяемой мочи у пациентов, не способных самостоятельно контролировать процесс мочеиспускания

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Область применения: Урология, анестезиология и реаниматология, хирургия.

Условия применения: лечебно-профилактические учреждения, а также домашние условия.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Пациенты с нарушением контроля мочеиспускания.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Мочеприемник прикроватный показан для сбора выделяемой мочи через катетер мочевого пузыря и спинального канала, когда больной находится в лежачем положении, при этом мочеприемник прикрепляется к кровати пациента.
2. Мочеприемник показан для сбора выделяемой мочи через катетер из мочевого пузыря в стационарных и домашних условиях, при этом мочеприемник фиксируется на ноге пациента для обеспечения его подвижности.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость материалов изготовления изделия.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Побочные эффекты при использовании мочеприемника по назначению отсутствуют. При применении мочеприемника ножного у пациента может возникнуть раздражение/покраснение в месте контакта с мешком для сбора мочи и эластичной ленты.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не использовать изделие в случае повреждения упаковки.
2. Не использовать изделие по окончании срока годности.
3. Не стерилизовать повторно.
4. Изделие предназначено для однократного применения и после использования должно быть утилизировано.
5. Во время использования изделия следить за тем, чтобы мочеприемник располагался ниже уровня мочевого пузыря.

КЛАССИФИКАЦИЯ

1. Класс потенциального риска медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: I.
2. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: 156370 (мочеприемники прикроватные), 156390 (мочеприемники ножные).
3. Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности: 32.50.50.141.
4. Вид контакта с организмом – изделие кратковременного контакта.

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

- ISO 8669-2 «Мочеприемники. Часть 2. Требования и методы испытаний»;
- ISO 14971 «Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям»;
- ISO 11135 «Стерилизация медицинской продукции. Этиленоксид. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий»;
- EN 1041 «Информация предоставлена производителем медицинских изделий»;
- ISO 11607-1 «Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам»;
- ISO 11607-2 «Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки»;
- ISO 10993-1 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;
- ISO 10993-5 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность»;
- ISO 10993-7 «Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 7. Остатки при стерилизации этиленоксидом»;
- ISO 10993-10 «Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 10. Пробы на раздражение и аллергическую реакцию замедленного типа»;
- MEDDEV 2.12-1 rev 8 «Руководство по системе наблюдения за медицинскими изделиями»;
- ISO 11737-1 «Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 1. Оценка популяции микроорганизмов на продукции»;

- ISO 11737-2 «Стерилизация медицинской продукции. Микробиологические методы. Часть 2. Исследования на стерильность, проведенные при определении, валидации и техническом обслуживании процесса стерилизации»;
- BS EN 1618 «Катетеры, отделимые от внутрисосудистых катетеров – методы испытаний общих свойств»;
- BS EN 1617 «Стерилизуемые дренажные катетеры и принадлежности для однократного использования».

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Мочеприемник прикроватный объемом 2000 мл с винтовым клапаном

Мочеприемник прикроватный объемом 2000 мл с винтовым клапаном представляет собой мешок, оснащенный дренажной трубкой, невозвратным клапаном, коническим коннектором с защитным колпачком, винтовым клапаном (выполняет функцию сливного клапана). Для крепления к кровати мешок оснащен 2-мя отверстиями, расположенными в верхней части мешка.

Общий вид мочеприемника прикроватного объемом 2000 мл с винтовым клапаном представлен на рисунке 1.

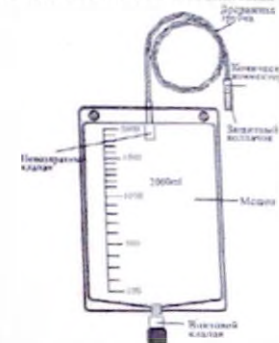


Рисунок 1 – Общий вид мочеприемника прикроватного объемом 2000 мл с винтовым клапаном

Мочеприемник прикроватный объемом 2000 мл с Т-образным клапаном

Мочеприемник прикроватный объемом 2000 мл с Т-образным клапаном представляет собой мешок, оснащенный дренажной трубкой, невозвратным клапаном, коническим коннектором с защитным колпачком, Т-образным клапаном (выполняет функцию сливного клапана). Для крепления к кровати мешок оснащен 2-мя отверстиями, расположенными в верхней части мешка.

Общий вид мочеприемника прикроватного объемом 2000 мл с Т-образным клапаном приведен на рисунке 2.



Рисунок 2 – Общий вид мочеприемника прикроватного объемом 2000 мл с Т-образным клапаном

Рисунок 9 – Общий вид инструкции по применению (страница 2-3)

Мочеприемник прикроватный объемом 2000 мл с пул-пуш клапаном

Мочеприемник прикроватный объемом 2000 мл с пул-пуш клапаном представляет собой мешок, оснащенный дренажной трубкой, невозвратным клапаном, коническим коннектором с защитным колпачком, пул-пуш клапаном (выполняет функцию сливного клапана). Для крепления к кровати мешок оснащен 2-мя отверстиями, расположенными в верхней части мешка.

Общий вид мочеприемника прикроватного объемом 2000 мл с пул-пуш клапаном приведен на рисунке 3.

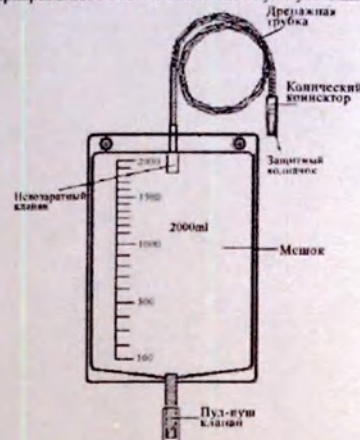


Рисунок 3— Общий вид мочеприемника прикроватного объемом 2000 мл с пул-пуш клапаном

Мочеприемник ножной объемом 750 мл

Мочеприемник ножной объемом 750 мл представляет собой мешок, оснащенный дренажной трубкой, Т-образным клапаном (выполняет функцию сливного клапана), коническим коннектором с защитным колпачком, двумя эластичными лентами с кнопкой. Для крепления к ноге пациента с помощью эластичных лент мешок оснащен 4-мя отверстиями, расположенными в верхней (2 шт.) и нижней (2 шт.) части мешка.

Общий вид мочеприемника ножного объемом 750 мл приведен на рисунке 4.

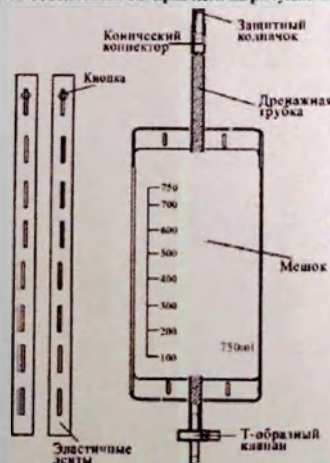


Рисунок 4— Общий вид мочеприемника ножного объемом 750 мл

Технические характеристики мочеприемников представлены в таблице 1.

Таблица 1— Технические характеристики мочеприемников

Характеристика	Мочеприемник прикроватный объемом 2000 мл с винтовым клапаном	Мочеприемник прикроватный объемом 2000 мл с Т-образным клапаном	Мочеприемник прикроватный объемом 2000 мл с пул-пуш клапаном	Мочеприемник ножной объемом 750 мл
Объем, мл, $\pm 2\%$	2000	2000	2000	750
Общая длина мочеприемника, мм, ± 10 мм	1245	1248	1216	414
Габаритные размеры мешка мм, ± 10 мм	280x204	280x204	280x204	251x144
Масса мешка, г, ± 3 г	39,3	39,1	37,0	С креплениями 35,2 Без креплений 27,0
Толщина стенки мешка, мм, $\pm 0,01$ мм	0,12	0,12	0,12	0,2
Длина дренажной трубки, мм, ± 20 мм	900	900	900	100
Внутренний диаметр дренажной трубки, мм, $\pm 0,1$ мм	5,2	5,2	5,2	5,2
Внешний диаметр дренажной трубки, мм, $\pm 0,1$ мм	6,5	6,5	6,5	6,5
Толщина стенки трубки мешка, мм, $\pm 0,1$ мм	0,65	0,65	0,65	0,65
Количество отверстий для подвешивания на кровати, шт.	2	2	2	—
Диаметр отверстий для подвешивания на кровати, мм	—	—	—	—
Максимальное значение: 15 мм ± 1 мм	15	15	15	—
Минимальное значение: 5 мм ± 1 мм	5	5	5	—
Расстояние между центрами креплений, мм, ± 1 мм	150	150	150	105
Размер винтового клапана (с учетом части в мешке), мм, $\pm 0,2$ мм:	—	—	—	—
- общая длина	64,08	—	—	—
- $O_{\text{вн}}$	15,75	—	—	—
Размер Т-образного клапана (с учетом части в мешке), мм, $\pm 0,2$ мм	—	41,6x73,2	—	41,6x75,8
Размер запорного механизма Т-образного клапана, мм, $\pm 0,2$ мм	—	5,6	—	5,6
Размер пул-пуш клапана (с учетом части в мешке), мм, $\pm 0,2$ мм:	—	—	—	—
- общая длина	—	—	46,3	—
- $O_{\text{вн}}$	—	—	11,2	—
Длина защитного колпачка, мм, $\pm 0,2$ мм	38,7	38,7	38,7	38,7
Размер отверстия в мешке для клапана, мм, $\pm 0,2$ мм	4,5	4,5	4,5	4,5

Сведения о шкалах мочеприемников представлены в таблице 2.

Таблица 2— Сведения о шкалах мочеприемников

Наименование параметра	Мочеприемник прикроватный объемом 2000 мл с винтовым клапаном	Мочеприемник прикроватный объемом 2000 мл с Т-образным клапаном	Мочеприемник прикроватный объемом 2000 мл с пул-пуш клапаном	Мочеприемник ножной объемом 750 мл
Расстояние между градуировочными линиями, мм, $\pm 2\%$	с 100-200 15мм с 200-300 12мм с 300-400 10мм с 400-500 10мм с 500-600 10мм с 600-700 9мм с 700-800 9мм с 800-900 10мм с 900-1000 10мм с 1000-1100 9мм с 1100-1200 9мм с 1200-1300 9мм с 1300-1400 10мм с 1400-1500 10мм с 1500-1600 12мм с 1600-1700 10мм с 1700-2000 19мм	с 100-200 14мм с 200-300 11,8мм с 300-400 10мм с 400-500 10мм с 500-600 9,9мм с 600-700 9 мм с 700-800 9мм с 800-900 10мм с 900-1000 10мм с 1000-1100 9мм с 1100-1200 9мм с 1200-1300 9мм с 1300-1400 10мм с 1400-1500 10мм с 1500-1600 12мм с 1600-1700 10мм с 1700-2000 19мм	с 100-200 14мм с 200-300 12мм с 300-400 10мм с 400-500 10мм с 500-600 10мм с 600-700 9мм с 700-800 9мм с 800-900 10мм с 900-1000 10мм с 1000-1100 9мм с 1100-1200 9мм с 1200-1300 9мм с 1300-1400 10мм с 1400-1500 10мм с 1500-1600 12мм с 1600-1700 10мм с 1700-2000 19мм	с 100-200 20мм с 200-300 20,5мм с 300-400 20,7мм с 400-500 22мм с 500-600 20мм с 600-700 19,8мм с 700-750 18мм
Объем между градуировочными линиями, мл, $\pm 2\%$	100	100	100	с 100 до 700 100 мл с 700 до 750 50 мл
Объем между линиями градуировки с цифрами, мл, $\pm 2\%$	500	500	500	с 100 до 700 100 мл с 700 до 750 50 мл

Общая длина шкалы, мм, ±2%	184	184	184	139,5
Размеры градуировочных линий мочеиспускников, мм				
- длина, ±2%	220	220	200	10
- толщина, ±0,2мм	1,1	1,1	1,1	—
- толщина градуировочной линии с цифрой	0,8	0,8	0,8	—
- толщина градуировочной линии без цифр				

Физические характеристики мочеиспускников представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Физические характеристики мочеиспускников

Характеристика	Мочеиспускник прикроватный объемом 2000 мл с винтовым клапаном	Мочеиспускник прикроватный объемом 2000 мл с Т-образным клапаном	Мочеиспускник прикроватный объемом 2000 мл с пул-пуш клапаном	Мочеиспускник ножной объемом 750 мл
Прочность отверстий для крепления мешка, г, ±20 г	3000	3000	3000	1130
Усилие открытия и закрытия клапанов				
- винтового клапана, Н, ±2 Н	20	—	—	—
- Т-образного клапана, Н, ±2 Н	—	20	—	20
- пул-пуш клапана, Н, ±2 Н	—	—	20	—
Время опорожнения мешка при полностью открытом клапане, мин, не более	2			
Герметичность	Изделие должно быть герметичным. Соединение деталей основной части устройства должно обеспечивать герметичность при максимальном внутреннем избыточном давлении 40 кПа			

Параметры коннектора

Общий вид коннектора представлен на рисунке 5. Характеристики коннектора представлены в таблице 4.

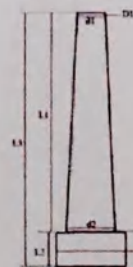


Рисунок 5 – Общий вид коннектора

Параметры эластичной ленты (для мочеиспускника ножного объемом 750 мл):

- Длина, мм – 450±5 мм;
- Ширина, мм – 19±1 мм;
- Масса, г – 4,2±0,5 г;
- Максимальная длина при растяжении, мм – 1000±10 мм;
- Количество отверстий для застегивания, шт. – 31-33;
- Шаг отверстий, мм – 15±0,2 мм;
- Усилие на разрыв эластичного ремешка, Н, не менее – 150 Н.

При изготовлении изделия используются следующие материалы: мешок, катетер, односторонний клапан изготовлены из поливинилхлорида, конический коннектор и защитный колпачок – из полиэтилена низкой плотности, винтовой и пул-пуш клапан – из поливинилхлорида + полиэтилена низкой плотности, Т-образный клапан – из сополимера полипропилена + полиэтилена низкой плотности, эластичная лента – из филаментной нити из полиэстера, кнопка эластичной ленты – из полиоксиметилена.

Изделие не содержит материалов животного и (или) человеческого происхождения.

Таблица 4 – Параметры коннектора

Характеристика на рис. 5	Значение (мм)
Минимальный внешний диаметр коннектора (D1)	6,65
Минимальный внутренний диаметр коннектора (d1)	4,46
Максимальный внешний диаметр коннектора (D2)	9,65
Максимальный внутренний диаметр коннектора (d2)	8,33
Внешний диаметр стопорного кольца крышки коннектора (D3)	12,50
Длина коннектора (L1)	35,37
Длина стопорного кольца крышки (L2)	1,15
Общая длина коннектора (со стопорным кольцом крышки) (L3)	36,52

Примечание: размеры коннектора указаны в миллиметрах, допустимое отклонение – ±0,05 мм

Изделие не содержит лекарственных препаратов и (или) фармацевтических субстанций.

ИНФОРМАЦИЯ О СТЕРИЛЬНОСТИ

Изделие стерильное.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Метод стерилизации изделия – этиленоксид.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить изделие в хорошо проветриваемом, сухом и чистом помещении. Не допускать воздействия агрессивных газов.

Температура окружающей среды: от +18°C до +28 °C.

Относительная влажность воздуха: не более 80%.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

При транспортировании не подвергать изделие сильному давлению. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Беречь от влаги. Допускается транспортировка в крытых транспортных средствах всех типов.

Температура окружающей среды: от +5°C до +35°C.

Относительная влажность воздуха: от 45 до 60%.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды: от +10 до +35°C.

Относительная влажность воздуха: от 45 до 60%.

ИНФОРМАЦИЯ О СРОКЕ ГОДНОСТИ

Срок годности изделия – 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Техническое обслуживание и ремонт не предусмотрены.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие после использования должно быть утилизировано как отход класса Б в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Изделие с истекшим сроком годности, а также изделие, у которого нарушена целостность упаковки, должно быть утилизировано как отход класса А в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Порядок применения мочеиспускников прикроватных:

1. Перед использованием изделия проверить целостность упаковки и срок годности изделия.

2. Извлечь изделие из упаковки.

3. Закрыть сливной клапан, в случае если тот открыт.

4. Соедините катетер, идущий от пациента, с коническим коннектором дренажной трубки, затем зафиксируйте изделие на кровати с помощью отверстий для подшививания. Для подшививания прикроватного мочеиспускника используйте крючок или палатки.

Внимание! Мочеиспускник должен располагаться ниже уровня мочевого пузыря!

5. Для считывания показаний заполнения мочеиспускника используйте шкалу на передней поверхности мочеиспускника.

6. Когда объем жидкости в мочеиспускнике достигнет максимального уровня шкалы на передней стороне мочеиспускника, удерживая его над унитазом, открыть сливной клапан. Когда мочеиспускник будет опустошен, закройте сливной клапан.

7. Не рекомендуется использовать мочеприемник более 2-х суток. Проводите своевременную замену изделия.

Порядок применения мочеприемника пожлого:

1. Перед использованием изделия проверить целостность упаковки и срок годности изделия.

2. Извлечь изделие из упаковки.

3. Закрепить сливной клапан, в случае если тот открыт.

4. Закрепить мочеприемник в удобном и надежном положении на бедре пациента, используя эластичные ленты с кнопкой.

Внимание! Мочеприемник должен располагаться ниже уровня мочевого пузыря!

5. Для считывания показаний заполнения мочеприемника используйте шкалу на передней поверхности мочеприемника.

6. Когда объем жидкости в мочеприемнике достигнет максимального уровня шкалы на передней стороне мочеприемника, удерживая его над унитазом, открыть сливной клапан. Когда мочеприемник будет опустошен, закройте сливной клапан.

7. Не рекомендуется использовать мочеприемник более 2-х суток. Проводите своевременную замену изделия.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1. Производитель гарантирует соответствие качества изделия в течение срока годности при соблюдении пользователем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

2. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Информация об ответственности уполномоченного представителя производителя за медицинское изделие перед третьими лицами

При обращении медицинского изделия на территории РФ в случае выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению, нежелательных реакций при его применении, особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации, необходимо направлять сообщение, содержащее указанные сведения, в уполномоченный орган/ организацию в сфере здравоохранения, а также в адрес уполномоченного представителя производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Парамед Дистрибьюшн» (ООО «Парамед Дистрибьюшн»), адрес: Россия, 620144, Свердловская область, Г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 249, телефон: (343) 226-14-04

E-mail: info@parmd.ru

РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ, НАНЕСЕННЫХ НА МАРКИРОВКУ

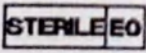
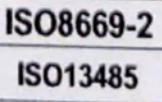
Символ/надпись	Расшифровка	Символ/надпись	Расшифровка
	Изготовитель		Дата изготовления
	Код партии		Использовать до
	Запрет на повторное применение		Обратитесь к инструкции по применению
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению		Не использовать при повреждении упаковки
	Стерилизация оксидом этилена		Стандарт соответствия
	Обращаться с осторожностью		Не допускать воздействия солнечного света
	Беречь от влаги		Верх

Рисунок 12 – Общий вид инструкции по применению (страница 8)

**Мочеприемник одноразовый стерильный
прикроватный объемом 2000 мл с винтовым
клапаном**

10 шт.


ВНИМАНИЕ:

1. Не использовать изделие в случае повреждения упаковки.
2. Не использовать изделие по окончании срока годности.
3. Не стерилизовать повторно.
4. Изделие предназначено для однократного применения и после использования должно быть утилизировано.
5. Во время использования изделия следить за тем, чтобы мочеприемник располагался ниже уровня мочевого пузыря.

LOT 20221003

03.10.2022

02.10.2027

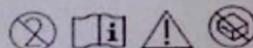

STERILE EO

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

ISO8669-2

ISO13485

Штрих-код



Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. («Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.»).
Адрес: Китайская Народная Республика, 16F-1, Building 1 No. 98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo,
Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Уполномоченный представитель: ООО «Парамед Дистрибушн». Адрес: Россия, 620144, Свердловская область,
Г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 249, тел.: +7 (343) 226-14-04.

Рисунок 13 – Общий вид групповой упаковки



Рисунок 14 – Общий вид транспортной упаковки – сторона 1



Рисунок 15 – Общий вид транспортной упаковки – сторона 1 и 2



Рисунок 16 – Общий вид транспортной упаковки – сторона 3 и 4

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ

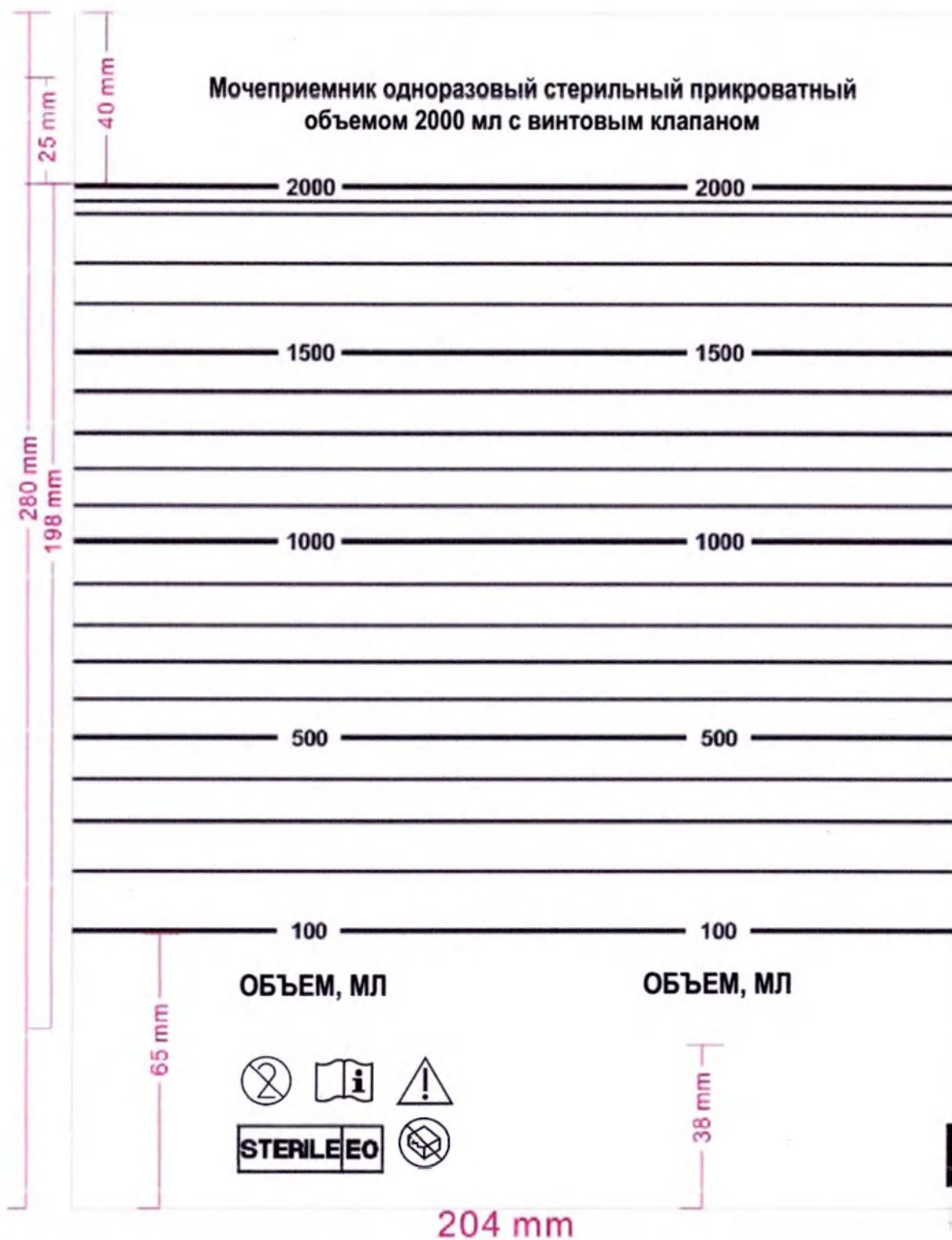


Рисунок 17 – Макет маркировки, наносимой на мочеприемник прикроватный объемом 2000 мл с винтовым клапаном

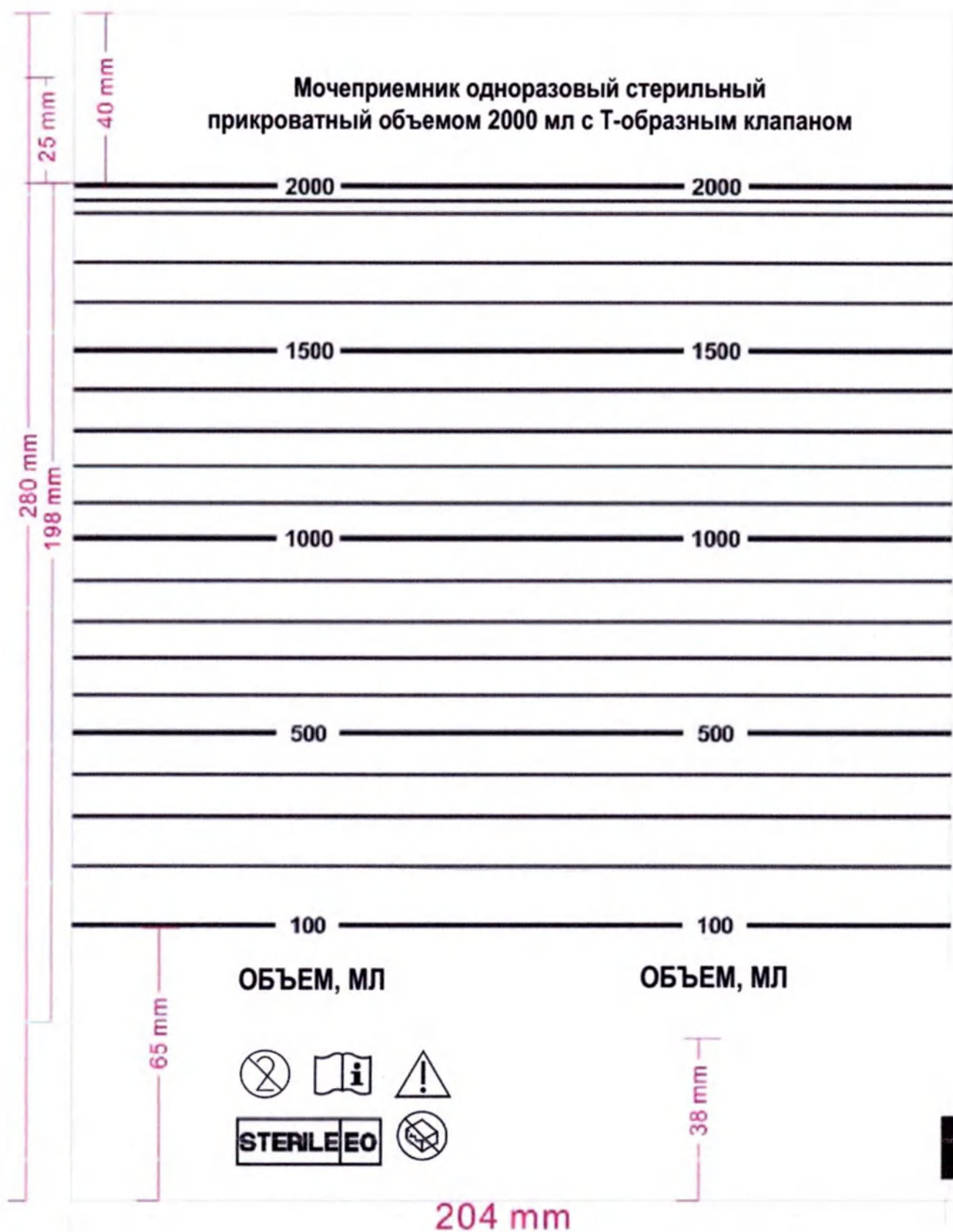


Рисунок 18 – Макет маркировки, наносимой на мочеприемник прикроватный объемом 2000 мл с Т-образным клапаном

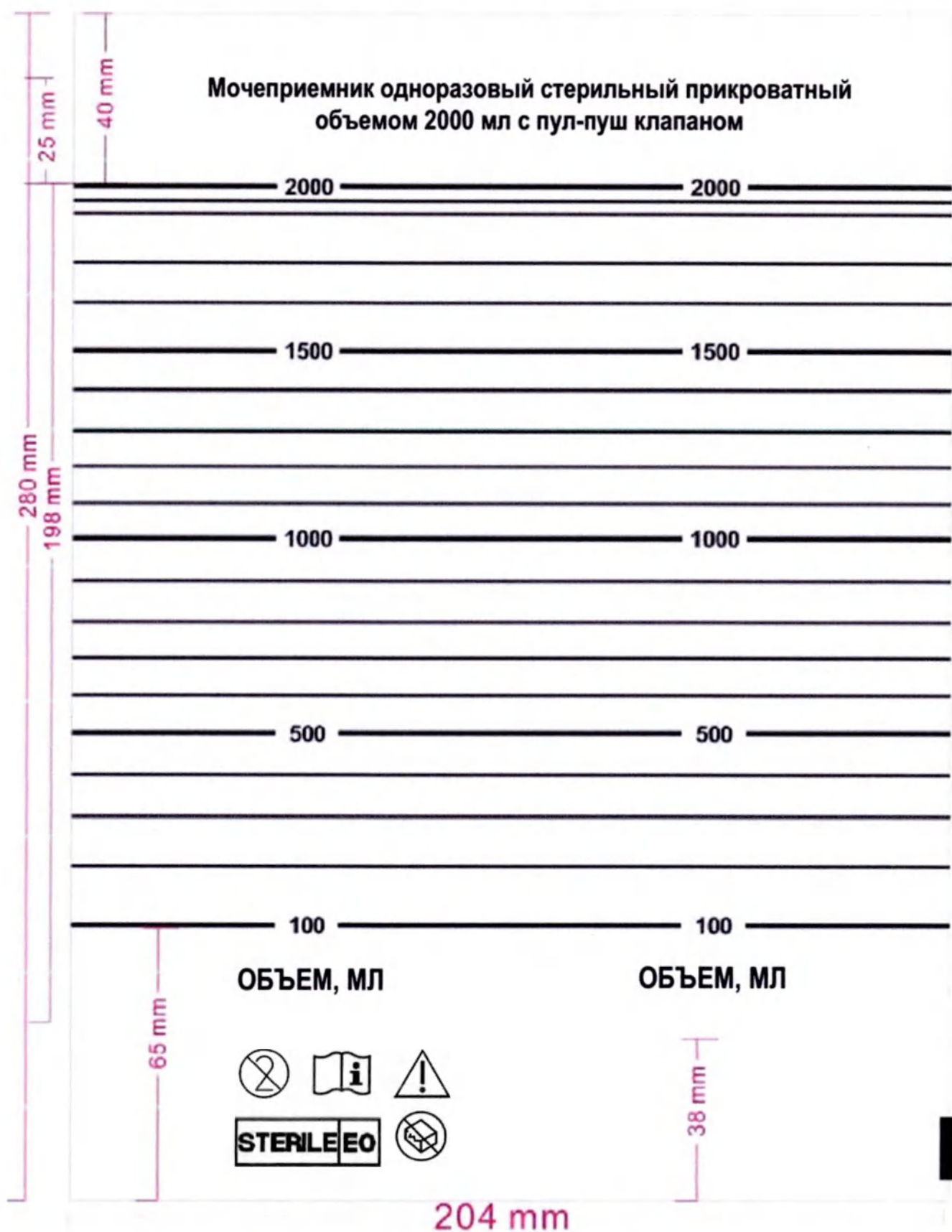


Рисунок 19 – Макет маркировки, наносимой на мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с пул-пуш клапаном

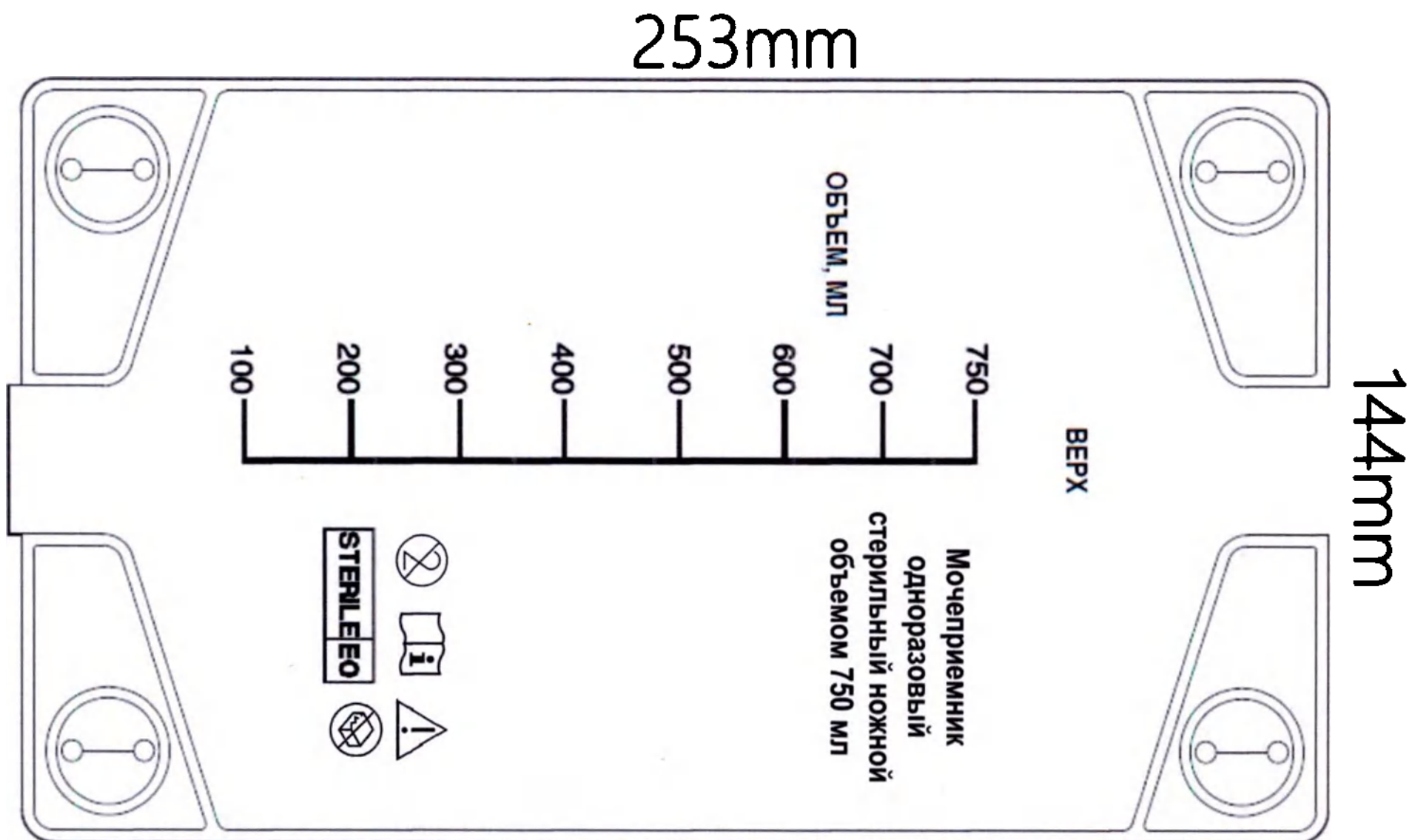


Рисунок 20 – Макет маркировки, наносимой на мочеприемник одноразовый стерильный ножной объемом 750 мл

Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с ВИНТОВЫМ клапаном

ВНИМАНИЕ:

1. Не использовать изделие в случае повреждения упаковки.
2. Не использовать изделие по окончании срока годности.
3. Не стерилизовать повторно.
4. Изделие предназначено для однократного применения и после использования должно быть утилизировано.
5. Во время использования изделия следить за тем, чтобы мочеприемник располагался ниже уровня мочевого пузыря.

открывать здесь ▲

LOT 20221003

03.10.2022

02.10.2027



STERILE EO

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

ISO8669-2

ISO13485



Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. («Нинбо Гримед Медицин Инструментс Ко., Лтд.»).
Адрес: Китайская Народная Республика, 16F-1, Building 1, No. 98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo,
Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Уполномоченный представитель: ООО «Парамед Дистрибушн». Адрес: Россия, 620144, Свердловская область,
Г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 249, тел.: +7 (343) 226-14-04.

Штрих-код

Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с Т-образным клапаном

ВНИМАНИЕ:

1. Не использовать изделие в случае повреждения упаковки.
2. Не использовать изделие по окончании срока годности.
3. Не стерилизовать повторно.
4. Изделие предназначено для однократного применения и после использования должно быть утилизировано.
5. Во время использования изделия следить за тем, чтобы мочеприемник располагался ниже уровня мочевого пузыря.

отрывать здесь

LOT 20221003
03.10.2022
02.10.2027



Регистрационное удостоверение № _____ от _____

ISO8669-2

ISO13485



Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. («Нинбо Гримед Медикал Инструментс Ко., Лтд.»).
Адрес: Китайская Народная Республика, 16F-1, Building 1, No. 98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo,
Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Уполномоченный представитель: ООО «Парамед Дистрибушн». Адрес: Россия, 620144, Свердловская область,
Г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 249, тел.: +7 (343) 226-14-04.

Штрих-код

Рисунок 22 – Макет маркировки, наносимой на индивидуальную упаковку мочеприемника прикроватного объемом 2000 мл с Т-образным клапаном

Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с пул-пуш клапаном

ВНИМАНИЕ:

1. Не использовать изделие в случае повреждения упаковки.
2. Не использовать изделие по окончании срока годности.
3. Не стерилизовать повторно.
4. Изделие предназначено для однократного применения и после использования должно быть утилизировано.
5. Во время использования изделия следить за тем, чтобы мочеприемник располагался ниже уровня мочевого пузыря.

открывать здесь ▶

LOT 20221003

 03.10.2022

 02.10.2027



Регистрационное удостоверение № _____ от _____

STERILE

ISO8669-2

ISO13485



Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. («Нинбо Гринмед Медицин Инструментс Ко., Лтд.»).
Адрес: Китайская Народная Республика, 16F-1, Building 1, No. 98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo,
Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Уполномоченный представитель: ООО «Парамед Дистрибушн». Адрес: Россия, 620144, Свердловская область,
Г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 249, тел.: +7 (343) 226-14-04.

Штрих-код

Рисунок 23 – Макет маркировки, наносимой на индивидуальную упаковку мочеприемника прикроватного объемом 2000 мл с пул-пуш клапаном

Мочеприемник одноразовый стерильный ножной объемом 750 мл

ВНИМАНИЕ:

1. Не использовать изделие в случае повреждения упаковки.
2. Не использовать изделие по окончании срока годности.
3. Не стерилизовать повторно.
4. Изделие предназначено для однократного применения и после использования должно быть утилизировано.
5. Во время использования изделия следить за тем, чтобы мочеприемник располагался ниже уровня мочевого пузыря.

открывать здесь

LOT 20221003

03.10.2022

02.10.2027



Регистрационное удостоверение № _____ от _____

STERILE

ISO8689-2

ISO13485



Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. («Нинбо Гримед Медикал Инструментс Ко., Лтд.»).
Адрес: Китайская Народная Республика, 16F-1, Building 1, No. 98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo,
Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Уполномоченный представитель: ООО «Парамед Дистрибушн». Адрес: Россия, 620144, Свердловская область,
Г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 249, тел.: +7 (343) 226-14-04.

Штрих-код

Рисунок 24 – Макет маркировки, наносимой на индивидуальную упаковку мочеприемника одноразового стерильного ножного объемом 750 мл

Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с винтовым клапаном

10 шт.

ВНИМАНИЕ:

1. Не использовать изделие в случае повреждения упаковки.
2. Не использовать изделие по окончании срока годности.
3. Не стерилизовать повторно.
4. Изделие предназначено для однократного применения и после использования должно быть утилизировано.
5. Во время использования изделия следить за тем, чтобы мочеприемник располагался ниже уровня мочевого пузыря.

LOT 20221003

03.10.2022

02.10.2027



STERILE

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

ISO 8869-2

ISO 13485

Штрих-код

 **Производитель:** Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. («Нинбо Гриммед Медикал Инструментс Ко., Лтд.»).
Адрес: Китайская Народная Республика, 16F-1, Building 1, No. 98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Уполномоченный представитель: ООО «Парамед Дистрибушн». Адрес: Россия, 620144, Свердловская область, Г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 249, тел.: +7 (343) 226-14-04.

Рисунок 25 – Макет маркировки, наносимой на групповую упаковку мочеприемника прикроватного объемом 2000 мл с винтовым клапаном

Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с Т-образным клапаном

10 шт.

ВНИМАНИЕ:

1. Не использовать изделие в случае повреждения упаковки.
2. Не использовать изделие по окончании срока годности.
3. Не стерилизовать повторно.
4. Изделие предназначено для однократного применения и после использования должно быть утилизировано.
5. Во время использования изделия следить за тем, чтобы мочеприемник располагался ниже уровня мочевого пузыря.

 20221003
 03.10.2022
 02.10.2027



Регистрационное удостоверение № _____ от _____

ISO9001-2

ISO13485

Штрих-код

 **Производитель:** Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. («Нинбо Гримед Медикал Инструментс Ко., Лтд.»).
Адрес: Китайская Народная Республика, 16F-1, Building 1, No. 98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Уполномоченный представитель: ООО «Парамед Дистрибьюшн». Адрес: Россия, 620144, Свердловская область, Г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 249, тел.: +7 (343) 226-14-04.

Рисунок 26 – Макет маркировки, наносимой на групповую упаковку мочеприемника прикроватного объемом 2000 мл с Т-образным клапаном

Мочеприемник одноразовый стерильный прикроватный объемом 2000 мл с пул-пуш клапаном

10 шт.

ВНИМАНИЕ:

1. Не использовать изделие в случае повреждения упаковки.
2. Не использовать изделие по окончании срока годности.
3. Не стерилизовать повторно.
4. Изделие предназначено для однократного применения и после использования должно быть утилизировано.
5. Во время использования изделия следить за тем, чтобы мочеприемник располагался ниже уровня мочевого пузыря.

 20221003

 03.10.2022

 02.10.2027



STERILE

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

ISO 9001-2

ISO 13485

Штрих-код

 **Производитель:** Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. («Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.»).
Адрес: Китайская Народная Республика, 16F-1, Building 1, No. 98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Уполномоченный представитель: ООО «Паремед Дистрибушн». Адрес: Россия, 620144, Свердловская область, Г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 249, тел.: +7 (343) 226-14-04.

Рисунок 27 – Макет маркировки, наносимой на групповую упаковку мочеприемника прикроватного объемом 2000 мл с пул-пуш клапаном

Мочеприемник одноразовый стерильный ножной объемом 750 мл

10 шт.

ВНИМАНИЕ:

1. Не использовать изделие в случае повреждения упаковки.
2. Не использовать изделие по окончании срока годности.
3. Не стерилизовать повторно.
4. Изделие предназначено для однократного применения и после использования должно быть утилизировано.
5. Во время использования изделия следить за тем, чтобы мочеприемник располагался ниже уровня мочевого пузыря.

 20221003
 03.10.2022
 02.10.2027



Регистрационное удостоверение № _____ от _____

ISO9001-2

ISO13485

Штрих-код

 **Производитель:** Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. («Нинбо Гримед Медикал Инструментс Ко., Лтд.»).
Адрес: Китайская Народная Республика, 16F-1, Building 1, No. 98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Уполномоченный представитель: ООО «Парамед Дистрибушн». Адрес: Россия, 620144, Свердловская область, Г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 249, тел.: +7 (343) 226-14-04.

Рисунок 28 – Макет маркировки, наносимой на групповую упаковку мочеприемника одноразового стерильного ножного объемом 750 мл






STERILE

Штрих-код

**Мочеприемник одноразовый
стерильный прикроватный объемом
2000 мл с T-образным клапаном**



Кол-во: 250 шт.
Масса Брутто: 11,5 кг
Масса Нетто: 10,5 кг
Размеры: 54X36X34 см






 ISO668-2
 ISO13485

Representatives: Wright-Crosland Medical Instruments Co., Ltd. (Wholly Owned Indian Company); Dr. Raju L. Khosla; Newkam Hospital, Patanjyoti, 10F-1, Building 1, No. 98 Changan Road, 1A Turk Road, 220022 (Mumbai, India); E-mail: Wright-Crosland@vsnl.com

Проектная организация: ООО «Инженерная Компания», Рязань, 60944, Коммунальный пер. 1/2, стр. 10, этаж 1. Контакт: ул. Мухоморова, д. 248, тел. +7 (4912) 22-14-01



Штрих-код

Хранить при температуре от +18 до +28°С и относительной влажности не более 80%.

Транспортировать при температуре от +5 до +35°С и относительной влажности от 45% до 60%.




 ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



**Мочеприемник одноразовый
стерильный прикроватный объемом
2000 мл с пул-пуш клапаном**

КОЛ-ВО: 250 ШТ.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

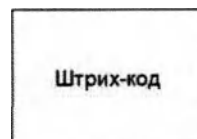

**Мочеприемник одноразовый
стерильный прикроватный объемом
2000 мл с пул-пуш клапаном**

КОТ:

W:

H:

Кол-во: 250 шт.

Масса Брутто: 11 кг

Масса Нетто: 10 кг

Размеры: 64X38X34 см



ISO8669-2

ISO13485

**Производитель: Ningbo Goodland Medical Instruments Co., Ltd. (Jinling Pujiang Medical
Instruments Co., Ltd.) Zhejiang Ningbo People's Republic of China
Road 10 Yong Zuo, 315042 Ningbo, Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA**


**Уполномоченный представитель: ООО «Гарант-Дистрибуция», Россия, 609144,
Свердловская обл., г.О. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 218, тел.: +7 (343)
285-14-01**



**Мочеприемник одноразовый
стерильный прикроватный объемом
2000 мл с пул-пуш клапаном**

КОЛ-ВО: 250 ШТ.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

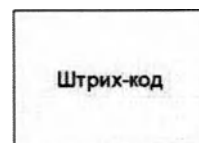

**Хранить при температуре от +16 до +28°C и относительной влажности
не более 80%.**

**Транспортировать при температуре от +6 до +35°C и относительной
влажности от 45% до 80%.**



Рисунок 31 – Макет маркировки транспортной упаковки мочеприемника прикроватного объемом 2000 мл с пул-пуш клапаном

Мочеприемник одноразовый стерильный ножной объемом 750 мл КОЛ-ВО: 250 шт. Регистрационное удостоверение № _____ от _____   Штрих-код	Мочеприемник одноразовый стерильный ножной объемом 750 мл <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> LOT:   </td> <td style="width: 50%;"> Кол-во: 250 шт. Масса Брутто: 11,8 кг Масса Нетто: 10,5 кг Размеры: 55X40X33 см </td> </tr> </table>   800669-2 8013485 Manufacturer: Ningbo Shuanghui Medical Instruments Co., Ltd. (Shuanghui Medical Instruments Co., Ltd.) Ningbo Shuanghui Medical Instruments Co., Ltd. 100-1, Building 1, No. 88 Changqian Road, 315042 Ningbo, Zhejiang Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Российский представитель: ООО «Гринтек Дистрибуция», Россия, 630044, Ставропольский обл., г.О. город Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Молодежная, д. 200, тел.: +7 (903) 325-54-04	LOT:  	Кол-во: 250 шт. Масса Брутто: 11,8 кг Масса Нетто: 10,5 кг Размеры: 55X40X33 см
LOT:  	Кол-во: 250 шт. Масса Брутто: 11,8 кг Масса Нетто: 10,5 кг Размеры: 55X40X33 см		
Мочеприемник одноразовый стерильный ножной объемом 750 мл КОЛ-ВО: 250 шт. Регистрационное удостоверение № _____ от _____   Штрих-код	Хранить при температуре от +18 до +28°C и относительной влажности не более 80%. Транспортировать при температуре от +6 до +35°C и относительной влажности от 45% до 80%. 		

Рисунок 32 – Макет маркировки транспортной упаковки мочеприемника ножного объемом 750 мл

Прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью

36 (тридцать шесть) листа(-ов)

ООО «Парамед Дистрибьюшн»

Директор Гимадитдинов Ф. Р.

Подпись

