

1

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

Радошкин И.В.
2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
(«Магниевая среда»)
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия
ООО «БиоХолд»,

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1




Реагент для бактериологических исследований
**«Питательная среда
для накопления сальмонелл сухая»
«Магниева среда»**

по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

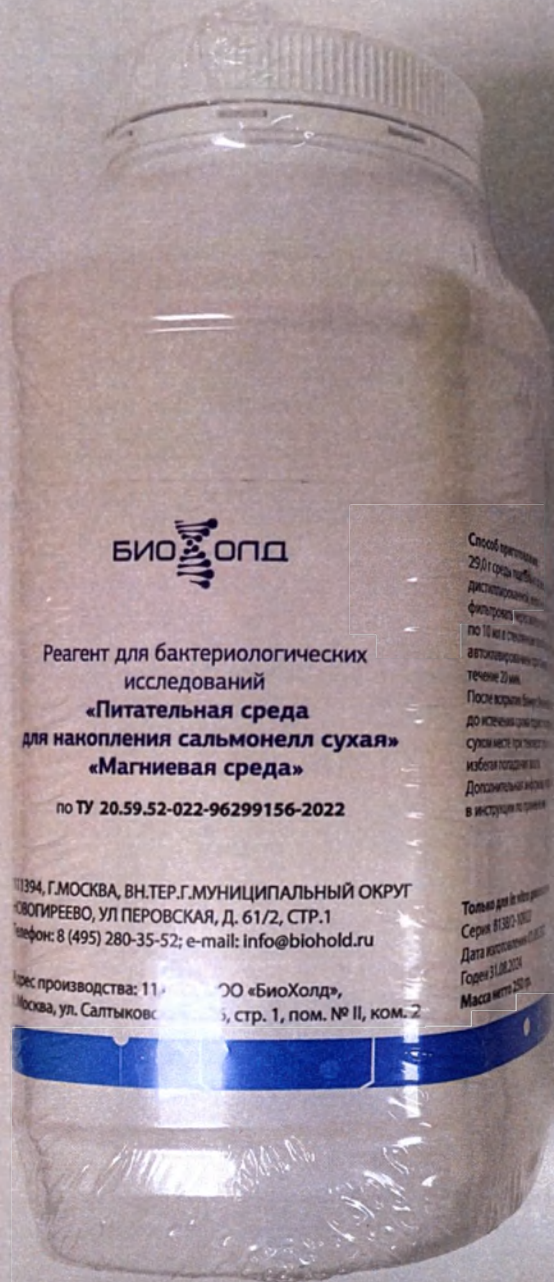

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
(«Магниева среда»)
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

Вариант №1
РУ №

Серия В138/1-10822
Дата изготовления: 08.08.2022
Годен: 07.08.2024

Наименование показателя
1. Внешний вид
Реагент
2. Технические характеристики
Прозрачность и цвет
сухих компонентов
Растворимость
Прозрачность
цветность раствора
pH
Потеря в массе при
высушивании, %
Аммонийный азот, %
Хлориды (в пересчете


Результаты контроля
с белыми
таться частицы
твой серии
илированной
быть

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
(«Магниева среда»)
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Назначение. Реагент для бактериологических исследований «Питательная среда для накопления сальмонелл сухая» («Магниева среда») предназначен для накопления сальмонелл, присутствующих в клинических образцах, при последующей идентификации в качестве вспомогательного средства в диагностике.

1.2. ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ
Исследуемые образцы – материал для накопления сальмонелл служит посев биоматериала человека (испражнения, моча, кровь, рвотные массы, промывные воды больных, а при необходимости и наличии специальных показаний и из желчи, дуоденального содержимого, секционного материала). Применение медицинского изделия не зависит от популяционных и демографических аспектов. Для диагностики in vitro.

1.3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Теоретическое обоснование. Острые кишечные инфекции (ОКИ) – один из самых распространенных видов патологии человека, которые могут вызывать различные представители мира микробов – бактерии, грибы, вирусы, простейшие. Все ОКИ протекают со сходной клинической картиной, поэтому для постановки этиологического диагноза необходима лабораторная диагностика. Среди бактерий ведущая роль в развитии ОКИ принадлежит представителям семейства Enterobacteriaceae, включающего десятки

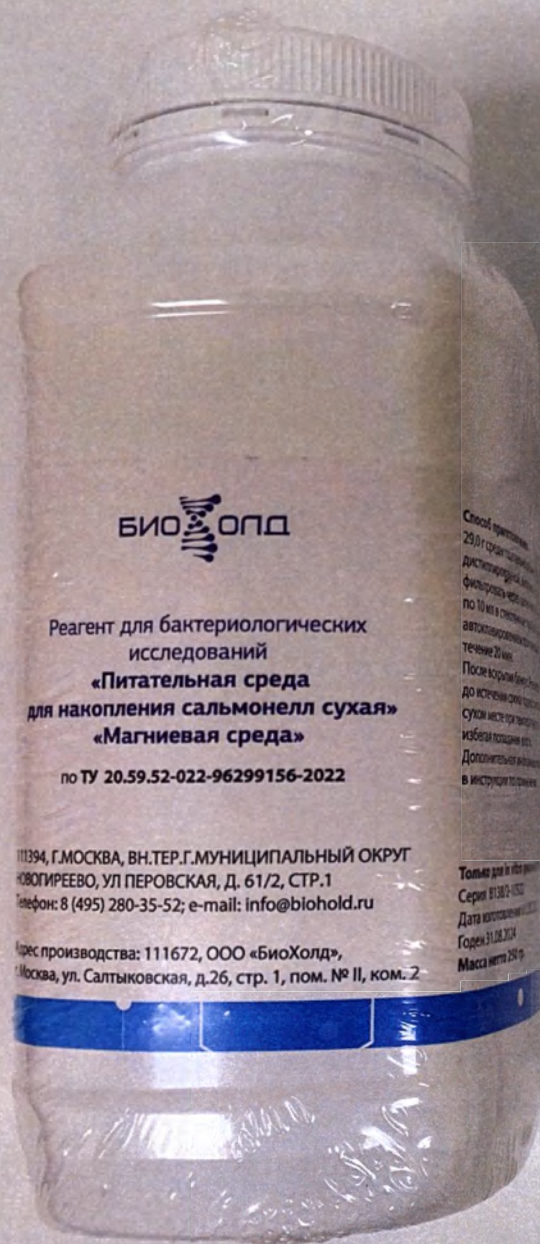

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.:+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
(«Магниева среда»)
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022
Серия В138/2-10922
Дата изготовления: 01.09.2022
Годен: 31.08.2024

Вариант №2

РУ №

Наименование показателя

1. Внешний вид

Реагент

2. Технические характеристики

Прозрачность и цвет сухих компонентов

Растворимость

Прозрачность
цветность раствора

pH

Потеря в массе при
высушивании, %

Аминный азот, %

Хлориды (в пересчете



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
«Магниева среда»
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение. Реагент для бактериологических исследований «Питательная среда для накопления сальмонелл сухая» («Магниева среда») предназначен для накопления сальмонелл, присутствующих в клинических образцах, при последующей идентификации в качестве вспомогательного средства в диагностике.

1.2. ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Исследуемые образцы – материал для накопления сальмонелл служит посев биоматериала человека (испражнения, моча, кровь, рвотные массы, промывные воды больных, а при необходимости и наличии специальных показаний и из желчи, дуоденального содержимого, секционного материала). Применение медицинского изделия не зависит от популяционных и демографических аспектов. Для диагностики *in vitro*.

1.3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Теоретическое обоснование. Острые кишечные инфекции (ОКИ) – один из самых распространенных видов патологии человека, которые могут вызывать различные представители мира микробов – бактерии, грибы, вирусы, простейшие. Все ОКИ протекают со сходной клинической картиной, поэтому для постановки этиологического диагноза необходима лабораторная диагностика. Среди бактерий ведущая роль в развитии ОКИ принадлежит представителям семейства Enterobacteriaceae, включающего десятки

Результаты
контроля

с белыми

гся частицы

ной серии
илированной

быть




БИОГОЛД

Реагент для бактериологических
исследований
**«Питательная среда
для накопления сальмонелл сухая»
«Магниева среда»**

по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № 11, комн. № 1

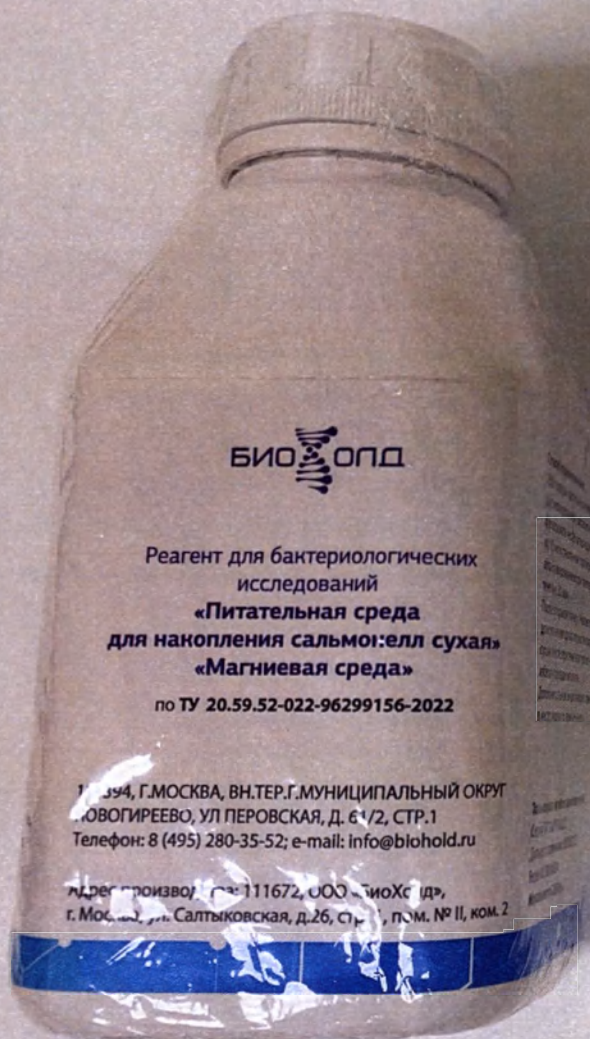

ООО «БиоХолд» 111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1 тел.: +7 (495) 280-35-52 e-mail: info@biohold.ru Адрес производства: ООО «БиоХолд», 111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2																																		
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № Реагент для бактериологических исследований «Питательная среда для накопления сальмонелл сухая» («Магниева среда») по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022																																		
Вариант №1	Серия В138/1-10822																																	
РУ №	Дата изготовления: 08.08.2022																																	
	Годен: 07.08.2024																																	
<table border="1"><tr><th>Наименование показателя</th></tr><tr><td>1. Внешний вид</td></tr><tr><td>Реагент</td></tr><tr><td>2. Технические характеристики</td></tr><tr><td>Прозрачность и цветность сухих компонентов</td></tr><tr><td>Растворимость</td></tr><tr><td>Прозрачность и цветность раствора</td></tr><tr><td>pH</td></tr><tr><td>Потеря в массе при высушивании, %</td></tr><tr><td>Аммонийный азот, %</td></tr><tr><td>Хлориды (в пересчете)</td></tr></table>	Наименование показателя	1. Внешний вид	Реагент	2. Технические характеристики	Прозрачность и цветность сухих компонентов	Растворимость	Прозрачность и цветность раствора	pH	Потеря в массе при высушивании, %	Аммонийный азот, %	Хлориды (в пересчете)	<table border="1"><tr><th colspan="2">Результаты контроля</th></tr><tr><td>белыми</td><td></td></tr><tr><td>частицы</td><td></td></tr><tr><td>серии</td><td></td></tr><tr><td>ированной</td><td></td></tr><tr><td>ть</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Результаты контроля		белыми		частицы		серии		ированной		ть											
Наименование показателя																																		
1. Внешний вид																																		
Реагент																																		
2. Технические характеристики																																		
Прозрачность и цветность сухих компонентов																																		
Растворимость																																		
Прозрачность и цветность раствора																																		
pH																																		
Потеря в массе при высушивании, %																																		
Аммонийный азот, %																																		
Хлориды (в пересчете)																																		
Результаты контроля																																		
белыми																																		
частицы																																		
серии																																		
ированной																																		
ть																																		



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
«Магниева среда»
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Назначение. Реагент для бактериологических исследований «Питательная среда для накопления сальмонелл сухая» («Магниева среда») предназначен для накопления сальмонелл, присутствующих в клинических образцах, при последующей идентификации в качестве вспомогательного средства в диагностике.

1.2. ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ
Исследуемые образцы – материал для накопления сальмонелл служит посев биоматериала человека (испражнения, моча, кровь, рвотные массы, промывные воды больных, а при необходимости и наличии специальных показаний и из желчи, дуоденального содержимого, секционного материала). Применение медицинского изделия не зависит от популяционных и демографических аспектов. Для диагностики in vitro.

1.3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Теоретическое обоснование. Острые кишечные инфекции (ОКИ) – один из самых распространённых видов патологии человека, которые могут вызывать различные представители мира микробов – бактерии, грибы, вирусы, простейшие. Все ОКИ протекают со сходной клинической картиной, поэтому для постановки этиологического диагноза необходима лабораторная диагностика. Среди бактерий ведущая роль в развитии ОКИ принадлежит представителям семейства Enterobacteriaceae, включающего десятки



ООО «БиоХолд»
 111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТ.1
 тел.+7 (495) 280-35-52
 e-mail: info@biohold.ru
 Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
 111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
(«Магниева среда»)
 по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022
 Серия В138/2-10922
 Дата изготовления: 01.09.2022
 Годен: 31.08.2024

Вариант №2

РУ №

Наименование показателя
1. Внешний вид
Реагент
2. Технические характеристики
Прозрачность и цвет
сухих компонентов
Растворимость
Прозрачность
цветность раствора
pH
Потеря в массе при
высушивании, %
Аминный азот, %
Хлориды (в пересчете)



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
(«Магниева среда»)
 по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение. Реагент для бактериологических исследований «Питательная среда для накопления сальмонелл сухая» («Магниева среда») предназначен для накопления сальмонелл, присутствующих в клинических образцах, при последующей идентификации в качестве вспомогательного средства в диагностике.

1.2. ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Исследуемые образцы – материалом для накопления сальмонелл служит посев биоматериала человека (испражнения, моча, кровь, рвотные массы, промывные воды больных, а при необходимости и наличии специальных показаний и из желчи, дуоденального содержимого, секционного материала). Применение медицинского изделия не зависит от популяционных и демографических аспектов. Для диагностики in vitro.

1.3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Теоретическое обоснование. Острые кишечные инфекции (ОКИ) – один из самых распространенных видов патологии человека, которые могут вызывать различные представители мира микробов – бактерии, грибы, вирусы, простейшие. Все ОКИ протекают со сходной клинической картиной, поэтому для постановки этиологического диагноза необходима лабораторная диагностика. Среди бактерий ведущая роль в развитии ОКИ принадлежит представителям семейства Enterobacteriaceae, включающего десятки

	Результаты контроля
с белыми	
ся частицы	
ой серии	
лированной	
ьть	

Прошито, пронумеровано
(7) лист (ов)),
скреплено печатью



Генеральный директор
«БиоХолд»

И.В. Радюшкин

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»



Радюшкин И.В.

«28» _____ 2024 г.

**ПРОЕКТ ЭТИКЕТКИ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
(«Магниева среда»)
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия

ООО «БиоХолд»,

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1



ООО «БиоХолд»

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

тел.+7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд», Россия, 111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1,
пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
«Магниева среда»
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

Вариант 1 по 250 г в составе:

- Панкреатический гидролизат рыбной муки.
- Магний хлористый безводный.
- Натрий хлористый.
- Калий фосфорнокислый однозамещенный.
- Бриллиантовый зеленый.
- Малахитовый зеленый.
- Натрий углекислый.
- Инструкция по применению.
- Паспорт качества.

pH 5,0 - 5,4

РУ _____

серия № _____

дата изготовления _____

срок годности _____

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°C

Для профессионального использования

Только для in vitro диагностики

Дополнительная информация в инструкции по применению

Масса нетто 250 г

Способ приготовления

29,0 г среды тщательно размешать в 1 л воды дистиллированной, кипятить в течение 2 мин, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, разлить по 10 мл в стеклянные пробирки и стерилизовать автоклавированием при температуре 112°C в течение 20 мин.

После вскрытия банку с Реагентом хранят до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом месте при температуре от +2° до +30°C, избегая попадания влаги.

LOT 1



ООО «БиоХолд»

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

тел.+7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд», Россия, 111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1,
пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
«Магниева среда»
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

Вариант 1 по 250 г в составе:

- Панкреатический гидролизат рыбной муки.
- Магний хлористый безводный.
- Натрий хлористый.
- Калий фосфорнокислый однозамещенный.
- Бриллиантовый зеленый.
- Малахитовый зеленый.
- Натрий углекислый.
- Инструкция по применению.
- Паспорт качества.

pH 5,0 - 5,4

РУ _____

серия № _____

дата изготовления _____

срок годности _____

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°C

Для профессионального использования

Только для *in vitro* диагностики

Дополнительная информация в инструкции по применению

Масса нетто 250 г

Способ приготовления

29,0 г среды тщательно размешать в 1 л воды дистиллированной, кипятить в течение 2 мин, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, разлить по 10 мл в стеклянные пробирки и стерилизовать автоклавированием при температуре 112°C в течение 20 мин.

После вскрытия банку с Реагентом хранят до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом месте при температуре от +2° до +30°C, избегая попадания влаги.

LOT

2



ООО «БиоХолд»

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

тел.+7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства:ООО «БиоХолд», Россия, 111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1,
пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
«Магниева среда»
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

Вариант 2 по 250 г в составе:

- Пептон сухой ферментативный
- Магний хлористый безводный
- Натрий хлористый
- Калий фосфорнокислый однозамещенный
- Бриллиантовый зеленый
- Малахитовый зеленый
- Натрий углекислый
- Инструкция по применению.
- Паспорт качества.

pH 5,0 - 5,4

РУ _____

серия № _____

дата изготовления _____

срок годности _____

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°C

Для профессионального использования

Только для in vitro диагностики

Дополнительная информация в инструкции по применению

Масса нетто 250 г

Способ приготовления

29,0 г среды тщательно размешать в 1 л воды дистиллированной, кипятить в течение 2 мин, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, разлить по 10 мл в стеклянные пробирки и стерилизовать автоклавированием при температуре 112°C в течение 20 мин.

После вскрытия банку с Реагентом хранят до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом месте при температуре от +2° до +30°C, избегая попадания влаги.

LOT

1



ООО «БиоХолд»

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

тел.+7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд», Россия, 111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1,
пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
«Магниевая среда»
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

Вариант 2 по 250 г в составе:

- Пептон сухой ферментативный
- Магний хлористый безводный
- Натрий хлористый
- Калий фосфорнокислый однозамещенный
- Бриллиантовый зеленый
- Малахитовый зеленый
- Натрий углекислый
- Инструкция по применению.
- Паспорт качества.

pH 5,0 - 5,4

РУ _____

серия № _____

дата изготовления _____

срок годности _____

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°C

Для профессионального использования

Только для *in vitro* диагностики

Дополнительная информация в инструкции по применению

Масса нетто 250 г

Способ приготовления

29,0 г среды тщательно размешать в 1 л воды дистиллированной, кипятить в течение 2 мин, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, разлить по 10 мл в стеклянные пробирки и стерилизовать автоклавированием при температуре 112°C в течение 20 мин.

После вскрытия банку с Реагентом хранят до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом месте при температуре от +2° до +30°C, избегая попадания влаги.

LOT 2

Прошито, пронумеровано
(5) лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор ООО
«БиоХолд»



И.В. Радюшкин

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «БиоХолд»



Радюшкин И.В.

2024 г.

**МАКЕТ РАЗВЕРТКИ ЭТИКЕТКИ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
(«Магниева среда»)
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия

ООО «БиоХолд»,

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

Вариант 1 по 250 г в составе:

- Панкреатический гидролизат рыбной муки
- Магний хлористый безводный
- Натрий хлористый
- Калий фосфорнокислый однозамещенный
- Бриллиантовый зеленый
- Малахитовый зеленый
- Натрий углекислый
- Инструкция по применению
- Паспорт качества



Реагент для бактериологических исследований
**«Питательная среда
для накопления сальмонелл сухая»
«Магниева среда»**

по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

pH 5,0-5,4

Хранение и транспортирование: в сухом месте,
в упаковке предприятия-производителя при
температуре от +2° до +30°С.

РУ №

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

29,0 г среды тщательно размешать в 1 л воды
дистиллированной, кипятить в течение 2 мин,
фильтровать через ватно-марлевый фильтр, разлить
по 10 мл в стеклянные пробирки и стерилизовать
автоклавированием при температуре 112°С в
течение 20 мин.

После вскрытия банку с Реагентом хранят
до истечения срока годности плотно закрытой, в
сухом месте при температуре от +2° до +30° С,
избегая попадания влаги.

Дополнительная информация приведена
в инструкции по применению.

LOT

1

Только для in vitro диагностики

Серия В138/1-10822

Дата изготовления 08.08.2022

Годен 07.08.2024

Масса нетто 250 гр.

Вариант 1 по 250 г в составе:

- Панкреатический гидролизат рыбной муки
- Магний хлористый безводный
- Натрий хлористый
- Калий фосфорнокислый однозамещенный
- Бриллиантовый зеленый
- Малахитовый зеленый
- Натрий углекислый
- Инструкция по применению
- Паспорт качества



Реагент для бактериологических исследований
**«Питательная среда
для накопления сальмонелл сухая»
«Магниева среда»**

по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

pH 5,0-5,4

Хранение и транспортирование: в сухом месте,
в упаковке предприятия-производителя при
температуре от +2° до +30°С.

РУ №

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

29,0 г среды тщательно размешать в 1 л воды
дистиллированной, кипятить в течение 2 мин,
фильтровать через ватно-марлевый фильтр, разлить
по 10 мл в стеклянные пробирки и стерилизовать
автоклавированием при температуре 112°С в
течение 20 мин.

После вскрытия банку с Реагентом хранят
до истечения срока годности плотно закрытой, в
сухом месте при температуре от +2° до +30° С,
избегая попадания влаги.

Дополнительная информация приведена
в инструкции по применению.

LOT
2

Только для in vitro диагностики

Серия В138/1-10822

Дата изготовления 08.08.2022

Годен 07.08.2024

Масса нетто 250 гр.

Вариант 2 по 250 г в составе:

- Пептон сухой ферментативный
- Магний хлористый безводный
- Натрий хлористый
- Калий фосфорнокислый однозамещенный
- Бриллиантовый зеленый
- Малахитовый зеленый
- Натрий углекислый
- Инструкция по применению
- Паспорт качества

pH 5,0-5,4

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°С.

РУ №



Реагент для бактериологических исследований
**«Питательная среда
для накопления сальмонелл сухая»
«Магниева среда»**

по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

29,0 г среды тщательно размешать в 1 л воды дистиллированной, кипятить в течение 2 мин, фильтровать через ватно-марлевый фильтр, разлить по 10 мл в стеклянные пробирки и стерилизовать автоклавированием при температуре 112°С в течение 20 мин.

После вскрытия банку с Реагентом хранят до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом месте при температуре от +2° до +30° С, избегая попадания влаги.

Дополнительная информация приведена в инструкции по применению.

LOT

1

Только для in vitro диагностики

Серия В138/2-10922

Дата изготовления 01.09.2022

Годен 31.08.2024

Масса нетто 250 гр.

Вариант 2 по 250 г в составе:

- Пептон сухой ферментативный
- Магний хлористый безводный
- Натрий хлористый
- Калий фосфорнокислый однозамещенный
- Бриллиантовый зеленый
- Малахитовый зеленый
- Натрий углекислый
- Инструкция по применению
- Паспорт качества



Реагент для бактериологических исследований
**«Питательная среда
для накопления сальмонелл сухая»
«Магниева среда»**

по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

pH 5,0-5,4

Хранение и транспортирование: в сухом месте,
в упаковке предприятия-производителя при
температуре от +2° до +30°С.

РУ №

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

29,0 г среды тщательно размешать в 1 л воды
дистиллированной, кипятить в течение 2 мин,
фильтровать через ватно-марлевый фильтр, разлить
по 10 мл в стеклянные пробирки и стерилизовать
автоклавированием при температуре 112°С в
течение 20 мин.

После вскрытия банку с Реагентом хранят
до истечения срока годности плотно закрытой, в
сухом месте при температуре от +2° до +30° С,
избегая попадания влаги.

Дополнительная информация приведена
в инструкции по применению.

LOT

2

Только для in vitro диагностики

Серия В138/2-10922

Дата изготовления 01.09.2022

Годен 31.08.2024

Масса нетто 250 гр.

Вариант 1 по 250 г в составе:

- Панкреатический гидролизат рыбной муки
- Магний хлористый безводный
- Натрий хлористый
- Калий фосфорнокислый однозамещенный
- Бриллиантовый зеленый
- Малахитовый зеленый
- Натрий углекислый
- Инструкция по применению
- Паспорт качества

pH 5,0-5,4

Хранение и транспортирование: в сухом месте,
в упаковке предприятия-производителя
при температуре от +2° до +30°С

РУ №



Реагент для бактериологических
исследований
**«Питательная среда
для накопления сальмонелл сухая»
«Магниева среда»**

по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР. 1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

среды тщательно размешать в 1 л воды
дистиллированной, кипятить в течение 2 мин,
фильтровать через ватно-марлевый фильтр, разлить
по 10 мл в стеклянные пробирки и стерилизовать
автоклавированием при температуре 112°С в
течение 20 мин.

После вскрытия банку с Реагентом хранят
до истечения срока годности плотно закрытой, в
сухом месте при температуре от +2° до +30° С,
избегая попадания влаги.

Дополнительная информация приведена
в инструкции по применению.

LOT

Только для in vitro диагностики

Серия

Дата изготовления

Годен

Масса нетто 250 гр.

Вариант 2 по 250 г в составе:

- Пептон сухой ферментативный
- Магний хлористый безводный
- Натрий хлористый
- Калий фосфорнокислый однозамещенный
- Бриллиантовый зеленый
- Малахитовый зеленый
- Натрий углекислый
- Инструкция по применению
- Паспорт качества



Реагент для бактериологических исследований
**«Питательная среда
для накопления сальмонелл сухая»
«Магниева среда»**

по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

pH 5,0-5,4

Хранение и транспортирование: в сухом месте,
в упаковке предприятия-производителя
при температуре от +2° до +30°C

РУ №

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

среды тщательно размешать в 1 л воды
дистиллированной, кипятить в течение 2 мин,
фильтровать через ватно-марлевый фильтр, разлить
по 10 мл в стеклянные пробирки и стерилизовать
автоклавированием при температуре 112°C в
течение 20 мин.

После вскрытия банку с Реагентом хранят
до истечения срока годности плотно закрытой, в
сухом месте при температуре от +2° до +30° C,
избегая попадания влаги.

Дополнительная информация приведена
в инструкции по применению.

LOT

Только для in vitro диагностики

Серия

Дата изготовления

Годен

Масса нетто 250 гр.

Прошито, пронумеровано
(7 лист (ов)),
скреплено печатью



Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

И.В. Радюшкин

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»


Радюшкин И.В.
«01» _____ 2024 г.

**ПРОЕКТ ЭТИКЕТКИ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
(«Магниева среда»)
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022**

производитель:

**Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия
ООО «БиоХолд»,
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1**

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
«Магниева среда»
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022**

серия № В138/1-10822

срок годности 07.08.2024 дата изготовления 08.08.2022

количество 8

масса нетто 2,48 кг масса брутто 2,68 кг



IVD



LOT

1

Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2


**Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
«Магниева среда»
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022**

серия № В138/2-10922

срок годности 31.08.2024 дата изготовления 01.09.2022

количество 8

масса нетто 2,48 кг масса брутто 2,68 кг

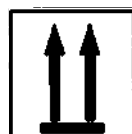

IVD



LOT

1

Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
«Магниева среда»
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

серия № В138/1-10822

срок годности 07.08.2024 дата изготовления 08.08.2022

количество 8

масса нетто 2,56 кг масса брутто 2,72 кг



Хранить при температуре от +2 °C до +30 °C

Транспортировать при температуре от +2 °C до +30 °C

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
«Магниева среда»
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

серия № В138/2-10922

срок годности 31.08.2024 дата изготовления 01.09.2022

количество 8

масса нетто 2,56 кг масса брутто 2,72 кг



Хранить при температуре от +2 °C до +30 °C

Транспортировать при температуре от +2 °C до +30 °C

Прошито, пронумеровано
(3 лист (ов)),
скреплено печатью



1

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

Радюшкин И.В.
«18» _____ 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
(«Магниевая среда»)
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия
ООО «БиоХолд»,

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
«Магниевая среда»
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

серия № В138/1-10822

срок годности 07.08.2024 дата изготовления 08.08.2022

количество 8

масса нетто 2,48 кг масса брутто 2,68 кг



Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С



БИОХОЛД

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
«Магниевая среда»

по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд», г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
«Магниевая среда»
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

БИОХОЛД

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
«Магниевая среда»
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение. Реагент для бактериологических исследований «Питательная среда для накопления сальмонелл сухая» («Магниевая среда») предназначен для накопления сальмонелл, присутствующих в клинических образцах, при последующей идентификации в питательного средства в диагностике.

1.2. ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Исследуемые образцы – материал для накопления сальмонелл

Вариант №1

РУ №

Наименование и
Г.Внешний вид
Реагент

2. Технические х-к
Прозрачность и
сухих компонентов
Растворимость

Прозрачность
цветность раствора
рН

Потеря в массе при
высушивании, %

Аммоний азот, %

Хлориды (в перес

71-10822
изменен 08.08.2022
8.2024

Результаты контроля	
г с больши	
ваться частицы	
зотной серии	
стиллированной	
н быть	

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
«Магниевая среда»
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

серия № В138/2-10922


срок годности 31.08.2024 дата изготовления 01.09.2022

количество 8

масса нетто 2,48 кг масса брутто 2,68 кг



Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С

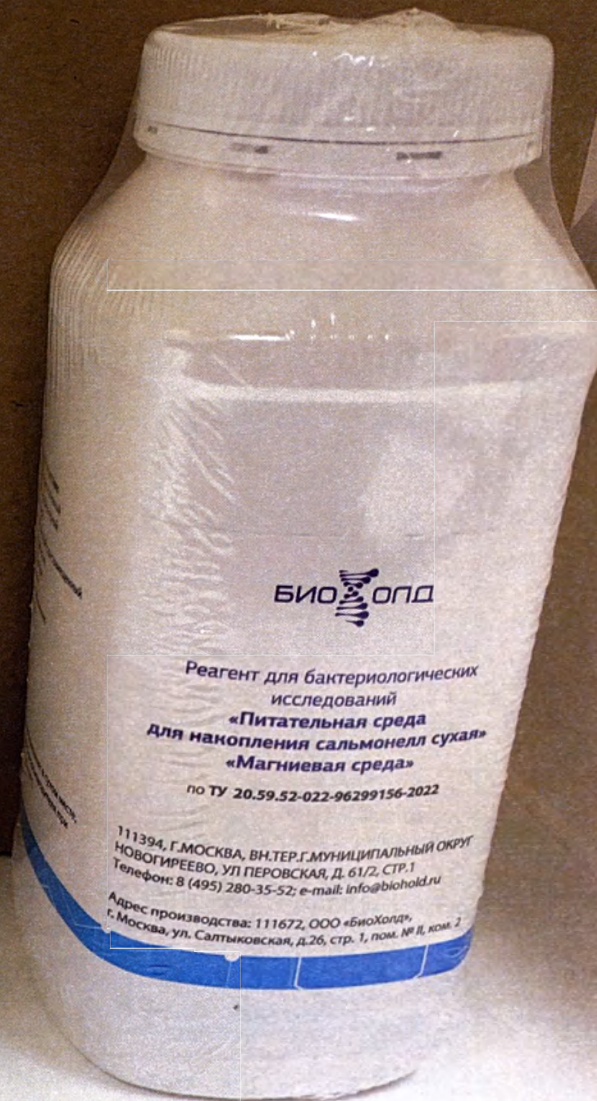

БИОХОЛД
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
«Магниевая среда»
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд», г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
«Магниевая среда»
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

Вариант №2

РУ №

Наименование по
1. Внешний вид
Реагент

2. Технические хар
Прозрачность и ш
сухих компонентов
Растворимость


Прозрачность
цветность раствора

рН

Потеря в массе при
высушивании, %

Аминный азот, %

Хлориды (в пересч

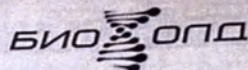

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
«Магниевая среда»
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение. Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая» («Магниевая среда») предназначен для накопления сальмонелл, присутствующих в клинических образцах, при последующей идентификации в качестве вспомогательного средства в диагностике.

/2-10922
издания: 01.09.2022
8.2024

	Результаты контроля
та с белыми	
ваться частицы	
ретной серии	
стилизованной	
н быть	

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
«Магниева среда»
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

серия № В138/2-10922
срок годности 31.08.2024 дата изготовления 01.09.2022
количество 8
масса нетто 2,56 кг масса брутто 2,72 кг




Хранить при температуре от +2 °C до +30 °C
Транспортировать при температуре от +2 °C до +30 °C



БИОХОЛД
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
«Магниева среда»
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд», г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
«Магниева среда»
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022
Серия В138/2-10922
даты: 01.09.2022
2024

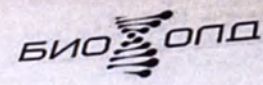

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательная среда для накопления сальмонелл сухая»
«Магниева среда»
по ТУ 20.59.52-022-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение. Реагент для бактериологических исследований «Питательная среда для накопления сальмонелл сухая» («Магниева среда») предназначен для накопления сальмонелл, присутствующих в биологических образцах, при последующей идентификации в качестве вспомогательного средства в диагностике

Вариант №2

ТУ №

Наименование показателя

1. Внешний вид

2. Технические характеристики

3. Прозрачность и цвет

4. Растворимость

5. Потеря в массе при высушивании, %

6. Аминный азот, %

7. Хлориды (в пересчете на хлор), %

Результаты контроля
с белыми
в виде частиц
в виде хлопьев
в виде осадка
в виде пленки
в виде комочков
в виде хлопьев
в виде осадка
в виде пленки
в виде комочков

прошито, пронумеровано
(5 лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор
«БиоХолд»



И.В. Радюшкин