



454021, г. Челябинск улица Энтузиастов 26Б, пом.12, оф.101
ИНН: 7447288920 КПП: 744701001
р/с: 40702810438040004570
Банк: ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 046577964
к/с: 30101810100000000964
Телефон: +7(351)701-01-00; +7 (351)750-58-75
www.nct.dental
E-mail: corp@nct.dental

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Общество с ограниченной
ответственностью «НС Технологии»
(ООО «НС Технологии»)



Дюрягин В.С.

СИСТЕМА ПРОТЕТИЧЕСКАЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИМПЛАНТАТОВ ПО ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Журнал внесения изменений:

Номер версии	Дата утверждения	Комментарий
б/н	01.02.2021 г.	Изначальная редакция документа
б/н	12.09.2022 г.	Изменение наименования медицинского изделия в связи со сменой кода ОКПД2
б/н	12.05.2023 г.	Изменение наименования медицинского изделия Скорректирован текст назначения МИ в связи со сменой наименования МИ Добавлены сведения о виде контакта с организмом человека Изменена комплектность, в т.ч. в части количества изделий, в связи со сменой наименования МИ Изменена маркировка

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование медицинского изделия

Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, варианты исполнения:

1. Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, в составе:

- 1.1. Формирователь десны, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: ВНА400020, ВНА402020, ВНА402035, ВНА403050, ВНА404070, ВНА452020, ВНА452035, ВНА453050, ВНА454070, ВНА552020, ВНА552035, ВНА553050, ВНА554070, ВНА652020, ВНА652035, ВНА653050, ВНА654070, ВНА753050, ВНА853050, ВНА953050 (при необходимости);
- 1.2. Абатмент двойной с шестигранником, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: DAL4500SH, DAL4500MH, DAL4500LH, DAL4510SH, DAL4510MH, DAL4510LH, DAL4520SH, DAL4520MH, DAL4520LH, DAL4530SH, DAL4530MH, DAL4530LH, DAL4540SH, DAL4540MH, DAL4540LH, DAL4550SH, DAL4550MH, DAL4550LH, DAL5500SH, DAL5500MH, DAL5500LH, DAL5510SH, DAL5510MH, DAL5510LH, DAL5520SH, DAL5520MH, DAL5520LH, DAL5530SH, DAL5530MH, DAL5530LH, DAL5540SH, DAL5540MH, DAL5540LH, DAL5550SH, DAL5550MH, DAL5550LH, DAL6500SH, DAL6500MH, DAL6500LH, DAL6510SH, DAL6510MH, DAL6510LH, DAL6520SH, DAL6520MH, DAL6520LH, DAL6530SH, DAL6530MH, DAL6530LH, DAL6540SH, DAL6540MH, DAL6540LH, DAL6550SH, DAL6550MH, DAL6550LH (при необходимости);
- 1.3. Абатмент двойной без шестигранника, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: DAL4500SN, DAL4500MN, DAL4500LN, DAL4510SN, DAL4510MN, DAL4510LN, DAL4520SN, DAL4520MN, DAL4520LN, DAL4530SN, DAL4530MN, DAL4530LN, DAL4540SN, DAL4540MN, DAL4540LN, DAL4550SN, DAL4550MN, DAL4550LN, DAL5500SN, DAL5500MN, DAL5500LN, DAL5510SN, DAL5510MN, DAL5510LN, DAL5520SN, DAL5520MN, DAL5520LN, DAL5530SN, DAL5530MN, DAL5530LN, DAL5540SN, DAL5540MN, DAL5540LN, DAL5550SN, DAL5550MN, DAL5550LN, DAL6500SN, DAL6500MN, DAL6500LN, DAL6510SN, DAL6510MN, DAL6510LN, DAL6520SN, DAL6520MN, DAL6520LN, DAL6530SN, DAL6530MN, DAL6530LN, DAL6540SN, DAL6540MN, DAL6540LN, DAL6550SN, DAL6550MN, DAL6550LN (при необходимости);
- 1.4. Абатмент временный, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: ТА4510N, ТА4520N, ТА5510N, ТА5520N (при необходимости);
- 1.5. Абатмент временный шестигранный, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: ТА4510H, ТА4520H, ТА5510H, ТА5520H (при необходимости);
- 1.6. Абатмент временный мультиюнит, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BSTC45S-N/D, BSTC55S-N/D, BSTC45B-N/D, BSTC55B-N/D (при необходимости);
- 1.7. Абатмент угловой, угол 15°, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: ANA450015N, ANA451015N, ANA452015N, ANA453015N, ANA454015N, ANA550015N, ANA551015N, ANA552015N, ANA553015N, ANA554015N (при необходимости);
- 1.8. Абатмент угловой, угол 25°, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: ANA450025N, ANA451025N, ANA452025N, ANA453025N, ANA454025N, ANA550025N, ANA551025N, ANA552025N, ANA553025N, ANA554025N (при необходимости);
- 1.9. Абатмент угловой шестигранный (тип А), угол 15°, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: ANA450015AH, ANA451015AH, ANA452015AH, ANA453015AH, ANA454015AH, ANA550015AH, ANA551015AH, ANA552015AH, ANA553015AH, ANA554015AH (при необходимости);
- 1.10. Абатмент угловой шестигранный (тип А), угол 25°, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: ANA450025AH, ANA451025AH, ANA452025AH, ANA453025AH,

- ANA454025AH, ANA550025AH, ANA551025AH, ANA552025AH, ANA553025AH, ANA554025AH (при необходимости);
- 1.11. Абатмент угловой шестигранный (тип В), угол 15°, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: ANA450015BH, ANA451015BH, ANA452015BH, ANA453015BH, ANA454015BH, ANA550015BH, ANA551015BH, ANA552015BH, ANA553015BH, ANA554015BH (при необходимости);
- 1.12. Абатмент угловой шестигранный (тип В), угол 25°, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: ANA450025BH, ANA451025BH, ANA452025BH, ANA453025BH, ANA454025BH, ANA550025BH, ANA551025BH, ANA552025BH, ANA553025BH, ANA554025BH (при необходимости);
- 1.13. Абатмент мультиюнит, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BMU0015, BMU0025, BMU0035, BMU0045 (при необходимости);
- 1.14. Абатмент угловой мультиюнит, угол 17°, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BMU1725, BMU1735, BMU1745 (при необходимости);
- 1.15. Абатмент угловой мультиюнит, угол 30°, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BMU3035, BMU3045 (при необходимости);
- 1.16. Абатмент угловой мультиюнит, угол 45°, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BMU4535, BMU4545 (при необходимости);
- 1.17. Абатмент комбинированный короткий, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BSTBH40, BSTBH42, BSTBH43, BSTBH50, BSTBH52, BSTBH53, BSTBH60, BSTBH62, BSTBH63 (при необходимости);
- 1.18. Абатмент комбинированный длинный, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BLTBH40, BLTBH42, BLTBH43, BLTBH50, BLTBH52, BLTBH53, BLTBH60, BLTBH62, BLTBH63 (при необходимости);
- 1.19. Абатмент шариковый, не более 100 шт.: BBAT41 (при необходимости);
- 1.20. Винт фиксирующий мультиюнит, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BSMU2013, BSMU1413 (при необходимости);
- 1.21. Винт имплантовода, не более 100 шт.: BVI001 (при необходимости);
- 1.22. Тело имплантовода, не более 100 шт.: BTI001 (при необходимости);
- 1.23. Имплантовод в сборе, не более 100 шт.: BKI001 (при необходимости);
- 1.24. Винт трансфера слепочного для открытой ложки, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BSTR001S, BSTR001L (при необходимости);
- 1.25. Винт трансфера слепочного для закрытой ложки, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BSTH001S, BSTH001L (при необходимости);
- 1.26. Аналог имплантата лабораторный мультиюнит, не более 100 шт.: BRMUA4514 (при необходимости);
- 1.27. Аналог для абатмента шарикового, не более 100 шт.: BBAL40 (при необходимости);
- 1.28. Трансфер слепочный для открытой ложки, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: TRO45SN, TRO55SN, TRO65SN, TRO45LN, TRO55LN, TRO65LN (при необходимости);
- 1.29. Трансфер слепочный для открытой ложки шестигранный, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: TRO45SH, TRO55SH, TRO65SH, TRO45LH, TRO55LH, TRO65LH (при необходимости);
- 1.30. Трансфер слепочный для закрытой ложки, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: TRC45SN, TRC55SN, TRC65SN, TRC45LN, TRC55LN, TRC65LN (при необходимости);
- 1.31. Трансфер слепочный для закрытой ложки шестигранный, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: TRC45SH, TRC55SH, TRC65SH, TRC45LH, TRC55LH, TRC65LH (при необходимости);
- 1.32. Инструкция по применению.
2. Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с НСТ, в составе:
- 2.1. Формирователь десны, совместим с НСТ, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: HA4010i, HA4015i, HA4020i, HA4025i, HA4030i, HA4035i, HA4040i, HA4045i, HA4050i, HA4055i, HA4060i, HA4065i, HA4070i, HA4075i, HA4080i, HA4510i, HA4515i, HA4520i, HA4525i, HA4530i, HA4535i, HA4540i, HA4545i, HA4550i, HA4555i, HA4560i, HA4565i,

- HA4570i, HA4575i, HA4580i, HA5010i, HA5015i, HA5020i, HA5025i, HA5030i, HA5035i, HA5040i, HA5045i, HA5050i, HA5055i, HA5060i, HA5065i, HA5070i, HA5075i, HA5080i, HA5510i, HA5515i, HA5520i, HA5525i, HA5530i, HA5535i, HA5540i, HA5545i, HA5550i, HA5555i, HA5560i, HA5565i, HA5570i, HA5575i, HA5580i (при необходимости);
- 2.2. Основание титановое (тип 1) шестигранное, dG1 3,5 мм, совместимо с НСТ, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: DA4500SH, DA4510SH, DA4520SH, DA4530SH, DA4540SH, DA4550SH, DA4500MH, DA4510MH, DA4520MH, DA4530MH, DA4540MH, DA4550MH, DA4500LH, DA4510LH, DA4520LH, DA4530LH, DA4540LH, DA4550LH, DA5500SH, DA5510SH, DA5520SH, DA5530SH, DA5540SH, DA5550SH, DA5500MH, DA5510MH, DA5520MH, DA5530MH, DA5540MH, DA5550MH, DA5500LH, DA5510LH, DA5520LH, DA5530LH, DA5540LH, DA5550LH (при необходимости);
- 2.3. Основание титановое (тип 1), dG1 3,5 мм, совместимо с НСТ, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: DA4500SN, DA4510SN, DA4520SN, DA4530SN, DA4540SN, DA4550SN, DA4500MN, DA4510MN, DA4520MN, DA4530MN, DA4540MN, DA4550MN, DA4500LN, DA4510LN, DA4520LN, DA4530LN, DA4540LN, DA4550LN, DA5500SN, DA5510SN, DA5520SN, DA5530SN, DA5540SN, DA5550SN, DA5500MN, DA5510MN, DA5520MN, DA5530MN, DA5540MN, DA5550MN, DA5500LN, DA5510LN, DA5520LN, DA5530LN, DA5540LN, DA5550LN (при необходимости);
- 2.4. Основание титановое (тип 1) шестигранное, dG1 3,3 мм, совместимо с НСТ, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: DAN4500SH, DAN4510SH, DAN4520SH, DAN4530SH, DAN4540SH, DAN4550SH, DAN4500MH, DAN4510MH, DAN4520MH, DAN4530MH, DAN4540MH, DAN4550MH, DAN4500LH, DAN4510LH, DAN4520LH, DAN4530LH, DAN4540LH, DAN4550LH (при необходимости);
- 2.5. Основание титановое (тип 1), dG1 3,3 мм, совместимо с НСТ, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: DAN4500SN, DAN4510SN, DAN4520SN, DAN4530SN, DAN4540SN, DAN4550SN, DAN4500MN, DAN4510MN, DAN4520MN, DAN4530MN, DAN4540MN, DAN4550MN, DAN4500LN, DAN4510LN, DAN4520LN, DAN4530LN, DAN4540LN, DAN4550LN (при необходимости);
- 2.6. Основание титановое (тип 1) шестигранное, dG1 3,2 мм, совместимо с НСТ, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: TiB4001SH, TiB4002SH, TiB4003SH, TiB5001SH, TiB5002SH, TiB5003SH, TiB6001SH, TiB6002SH, TiB6003SH, TiB4001LH, TiB4002LH, TiB4003LH, TiB5001LH, TiB5002LH, TiB5003LH, TiB6001LH, TiB6002LH, TiB6003LH (при необходимости);
- 2.7. Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с НСТ, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: TiB10, TiB12, TiB14, TiB10N, TiB12N, TiB14N (при необходимости);
- 2.8. Винт фиксирующий, совместим с НСТ, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: SC2585, SC2285, SC2275, SC2265 (при необходимости);
- 2.9. Аналог имплантата лабораторный, совместим с НСТ, не более 100 шт.: BRN001 (при необходимости);
- 2.10. Скан-маркер НСТ, не более 100 шт.: SM438 (при необходимости);
- 2.11. Инструкция по применению.
3. Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с ANK, в составе:
- 3.1. Формирователь десны, совместим с ANK, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: HA15Sa, HA30Sa, HA15La, HA30La (при необходимости);
- 3.2. Инструкция по применению.
4. Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с STM, в составе:
- 4.1. Формирователь десны, совместим с STM, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: HA4010st, HA4015st, HA4020st, HA4025st, HA4030st, HA4035st, HA4040st, HA4045st, HA4050st, HA4055st, HA4060st, HA4065st, HA4070st, HA4075st, HA4080st, HA4510st, HA4515st, HA4520st, HA4525st, HA4530st, HA4535st, HA4540st, HA4545st, HA4550st,

- HA4555st, HA4560st, HA4565st, HA4570st, HA4575st, HA4580st, HA5010st, HA5015st, HA5020st, HA5025st, HA5030st, HA5035st, HA5040st, HA5045st, HA5050st, HA5055st, HA5060st, HA5065st, HA5070st, HA5075st, HA5080st, HA5510st, HA5515st, HA5520st, HA5525st, HA5530st, HA5535st, HA5540st, HA5545st, HA5550st, HA5555st, HA5560st, HA5565st, HA5570st, HA5575st, HA5580st (при необходимости);
- 4.2. Инструкция по применению.
5. Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с OSSTEM IMPLANT TS, в составе:
- 5.1. Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с OSSTEM IMPLANT TS, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGOM135-SC/U, BGOM235-SC/U, BGOM335-SC/U, BGOM135-FC/U, BGOM235-FC/U, BGOM335-FC/U, BGOR140-SC/U, BGOR240-SC/U, BGOR340-SC/U, BGOR140-FC/U, BGOR240-FC/U, BGOR340-FC/U (при необходимости);
- 5.2. Основание титановое (тип 1), совместимо с OSSTEM IMPLANT TS, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGOM135-BC/U, BGOM235-BC/U, BGOM335-BC/U, BGOR140-BC/U, BGOR240-BC/U, BGOR340-BC/U (при необходимости);
- 5.3. Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с OSSTEM IMPLANT TS, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZOM135-SC/U, BZOM235-SC/U, BZOM335-SC/U, BZOM135-FC/U, BZOM235-FC/U, BZOM335-FC/U, BZOR140-SC/U, BZOR240-SC/U, BZOR340-SC/U, BZOR140-FC/U, BZOR240-FC/U, BZOR340-FC/U (при необходимости);
- 5.4. Основание титановое (тип 2), совместимо с OSSTEM IMPLANT TS, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZOM135-BC/U, BZOM235-BC/U, BZOM335-BC/U, BZOR140-BC/U, BZOR240-BC/U, BZOR340-BC/U (при необходимости);
- 5.5. Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с OSSTEM IMPLANT TS, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BPOM135-A, BPOM135-M, BPOM135-Z, BPOM135-D, BPOR135-A, BPOR135-M, BPOR135-Z, BPOR135-D (при необходимости);
- 5.6. Винт фиксирующий, совместим с OSSTEM IMPLANT TS, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BSOM135, BSOR140 (при необходимости);
- 5.7. Аналог имплантата лабораторный, совместим с OSSTEM IMPLANT TS, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BROM135, BROR135 (при необходимости);
- 5.8. Инструкция по применению.
6. Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с DENTIUM SUPERLINE, в составе:
- 6.1. Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с DENTIUM SUPERLINE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGD1137-SC/U, BGD1237-SC/U, BGD1337-SC/U, BGD1137-FC/U, BGD1237-FC/U, BGD1337-FC/U (при необходимости);
- 6.2. Основание титановое (тип 1), совместимо с DENTIUM SUPERLINE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGD1137-BC/U, BGD1237-BC/U, BGD1337-BC/U (при необходимости);
- 6.3. Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с DENTIUM SUPERLINE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZD1137-SC/U, BZD1237-SC/U, BZD1337-SC/U, BZD1137-FC/U, BZD1237-FC/U, BZD1337-FC/U (при необходимости);
- 6.4. Основание титановое (тип 2), совместимо с DENTIUM SUPERLINE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZD1137-BC/U, BZD1237-BC/U, BZD1337-BC/U (при необходимости);
- 6.5. Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с DENTIUM SUPERLINE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BPD1137-A, BPD1137-M, BPD1137-Z, BPD1137-D, BPD1237-A, BPD1237-M, BPD1237-Z, BPD1237-D (при необходимости);
- 6.6. Винт фиксирующий, совместим с DENTIUM SUPERLINE, не более 100 шт.: BSD1137/237 (при необходимости);
- 6.7. Аналог имплантата лабораторный, совместим с DENTIUM SUPERLINE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BRD1137, BRD1237 (при необходимости);
- 6.8. Инструкция по применению.

7. Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с STRAUMANN BONE LEVEL, в составе:
 - 7.1. Основание титановое (тип 1), совместимо с STRAUMANN BONE LEVEL, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGSB133-SC/U, BGSB233-SC/U, BGSB333-SC/U, BGSB133-BC/U, BGSB233-BC/U, BGSB333-BC/U, BGSB133-FC/U, BGSB233-FC/U, BGSB333-FC/U, BGSB141-SC/U, BGSB241-SC/U, BGSB341-SC/U, BGSB141-BC/U, BGSB241-BC/U, BGSB341-BC/U, BGSB141-FC/U, BGSB241-FC/U, BGSB341-FC/U (при необходимости);
 - 7.2. Основание титановое (тип 2), совместимо с STRAUMANN BONE LEVEL, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZSB133-SC/U, BZSB233-SC/U, BZSB333-SC/U, BZSB133-BC/U, BZSB233-BC/U, BZSB333-BC/U, BZSB133-FC/U, BZSB233-FC/U, BZSB333-FC/U, BZSB141-SC/U, BZSB241-SC/U, BZSB341-SC/U, BZSB141-BC/U, BZSB241-BC/U, BZSB341-BC/U, BZSB141-FC/U, BZSB241-FC/U, BZSB341-FC/U (при необходимости);
 - 7.3. Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с STRAUMANN BONE LEVEL, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BPSB133-A, BPSB133-M, BPSB133-Z, BPSB133-D, BPSB141-A, BPSB141-M, BPSB141-Z, BPSB141-D (при необходимости);
 - 7.4. Винт фиксирующий, совместим с STRAUMANN BONE LEVEL, не более 100 шт.: BSSB133/141 (при необходимости);
 - 7.5. Аналог имплантата лабораторный, совместим с STRAUMANN BONE LEVEL, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BRSB133, BRSB141 (при необходимости);
 - 7.6. Инструкция по применению.
8. Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с STRAUMANN TISSUE LEVEL, в составе:
 - 8.1. Основание титановое (тип 1) восьмигранное, совместимо с STRAUMANN TISSUE LEVEL, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGST148-SC/U, BGST248-SC/U, BGST348-SC/U, BGST148-RC/U, BGST248-RC/U, BGST348-RC/U, BGST165-SC/U, BGST265-SC/U, BGST365-SC/U, BGST165-RC/U, BGST265-RC/U, BGST365-RC/U (при необходимости);
 - 8.2. Основание титановое (тип 1), совместимо с STRAUMANN TISSUE LEVEL, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGST148-BC/U, BGST248-BC/U, BGST348-BC/U, BGST165-BC/U, BGST265-BC/U, BGST365-BC/U (при необходимости);
 - 8.3. Основание титановое (тип 2) восьмигранное, совместимо с STRAUMANN TISSUE LEVEL, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZST148-SC/U, BZST248-SC/U, BZST348-SC/U, BZST148-RC/U, BZST248-RC/U, BZST348-RC/U, BZST165-SC/U, BZST265-SC/U, BZST365-SC/U, BZST165-RC/U, BZST265-RC/U, BZST365-RC/U (при необходимости);
 - 8.4. Основание титановое (тип 2), совместимо с STRAUMANN TISSUE LEVEL, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZST148-BC/U, BZST248-BC/U, BZST348-BC/U, BZST165-BC/U, BZST265-BC/U, BZST365-BC/U (при необходимости);
 - 8.5. Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с STRAUMANN TISSUE LEVEL, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BPST148-A, BPST148-M, BPST148-Z, BPST148-D, BPST165-A, BPST165-M, BPST165-Z, BPST165-D (при необходимости);
 - 8.6. Винт фиксирующий, совместим с STRAUMANN TISSUE LEVEL, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BSST148, BSST165 (при необходимости);
 - 8.7. Аналог имплантата лабораторный, совместим с STRAUMANN TISSUE LEVEL, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BRST148, BRST165 (при необходимости);
 - 8.8. Инструкция по применению.
9. Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с NOBEL BIO CARE ACTIVE, в составе:
 - 9.1. Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с NOBEL BIO CARE ACTIVE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGNA135-SC/U, BGNA235-SC/U,

- BGNA335-SC/U, BGNA135-FC/U, BGNA235-FC/U, BGNA335-FC/U, BGNA143-SC/U, BGNA243-SC/U, BGNA343-SC/U, BGNA143-FC/U, BGNA243-FC/U, BGNA343-FC/U (при необходимости);
- 9.2. Основание титановое (тип 1), совместимо с NOBEL BIO CARE ACTIVE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGNA135-BC/U, BGNA235-BC/U, BGNA335-BC/U, BGNA143-BC/U, BGNA243-BC/U, BGNA343-BC/U (при необходимости);
- 9.3. Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с NOBEL BIO CARE ACTIVE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZNA135-SC/U, BZNA235-SC/U, BZNA335-SC/U, BZNA135-FC/U, BZNA235-FC/U, BZNA335-FC/U, BZNA143-SC/U, BZNA243-SC/U, BZNA343-SC/U, BZNA143-FC/U, BZNA243-FC/U, BZNA343-FC/U (при необходимости);
- 9.4. Основание титановое (тип 2), совместимо с NOBEL BIO CARE ACTIVE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZNA135-BC/U, BZNA235-BC/U, BZNA335-BC/U, BZNA143-BC/U, BZNA243-BC/U, BZNA343-BC/U (при необходимости);
- 9.5. Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с NOBEL BIO CARE ACTIVE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BPNA135-A, BPNA135-M, BPNA135-Z, BPNA135-D, BPNA143-A, BPNA143-M, BPNA143-Z, BPNA143-D (при необходимости);
- 9.6. Винт фиксирующий, совместим с NOBEL BIO CARE ACTIVE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BSNA135, BSNA143 (при необходимости);
- 9.7. Аналог имплантата лабораторный, совместим с NOBEL BIO CARE ACTIVE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BRNA135, BRNA143 (при необходимости);
- 9.8. Инструкция по применению.
- 10. Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с NOBEL BRANEMARK, в составе:**
- 10.1. Основание титановое (тип 1) восьмигранное, совместимо с NOBEL BRANEMARK, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGNB135-SC/U, BGNB235-SC/U, BGNB335-SC/U, BGNB135-FC/U, BGNB235-FC/U, BGNB335-FC/U, BGNB141-SC/U, BGNB241-SC/U, BGNB341-SC/U, BGNB141-FC/U, BGNB241-FC/U, BGNB341-FC/U, BGNB151-SC/U, BGNB251-SC/U, BGNB351-SC/U, BGNB151-FC/U, BGNB251-FC/U, BGNB351-FC/U (при необходимости);
- 10.2. Основание титановое (тип 1), совместимо с NOBEL BRANEMARK, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGNB135-BC/U, BGNB235-BC/U, BGNB335-BC/U, BGNB141-BC/U, BGNB241-BC/U, BGNB341-BC/U, BGNB151-BC/U, BGNB251-BC/U, BGNB351-BC/U (при необходимости);
- 10.3. Основание титановое (тип 2) восьмигранное, совместимо с NOBEL BRANEMARK, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZNB135-SC/U, BZNB235-SC/U, BZNB335-SC/U, BZNB135-FC/U, BZNB235-FC/U, BZNB335-FC/U, BZNB141-SC/U, BZNB241-SC/U, BZNB341-SC/U, BZNB141-FC/U, BZNB241-FC/U, BZNB341-FC/U, BZNB151-SC/U, BZNB251-SC/U, BZNB351-SC/U, BZNB151-FC/U, BZNB251-FC/U, BZNB351-FC/U (при необходимости);
- 10.4. Основание титановое (тип 2), совместимо с NOBEL BRANEMARK, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZNB135-BC/U, BZNB235-BC/U, BZNB335-BC/U, BZNB141-BC/U, BZNB241-BC/U, BZNB341-BC/U, BZNB151-BC/U, BZNB251-BC/U, BZNB351-BC/U (при необходимости);
- 10.5. Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с NOBEL BRANEMARK, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BPNB135-A, BPNB135-M, BPNB135-Z, BPNB135-D, BPNB141-A, BPNB141-M, BPNB141-Z, BPNB141-D, BPNB151-A, BPNB151-M, BPNB151-Z, BPNB151-D (при необходимости);
- 10.6. Винт фиксирующий, совместим с NOBEL BRANEMARK, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BSNB135, BSNB141, BSNB151 (при необходимости);
- 10.7. Аналог имплантата лабораторный, совместим с NOBEL BRANEMARK, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BRNB135, BRNB141, BRNB151 (при необходимости);
- 10.8. Инструкция по применению.

11. Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с NOBEL REPLACE, в составе:
- 11.1. Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с NOBEL REPLACE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGNR135-SC/U, BGNR235-SC/U, BGNR335-SC/U, BGNR135-FC/U, BGNR235-FC/U, BGNR335-FC/U, BGNR143-SC/U, BGNR243-SC/U, BGNR343-SC/U, BGNR143-FC/U, BGNR243-FC/U, BGNR343-FC/U, BGNR150-SC/U, BGNR250-SC/U, BGNR350-SC/U, BGNR150-FC/U, BGNR250-FC/U, BGNR350-FC/U (при необходимости);
- 11.2. Основание титановое (тип 1), совместимо с NOBEL REPLACE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGNR135-BC/U, BGNR235-BC/U, BGNR335-BC/U, BGNR143-BC/U, BGNR243-BC/U, BGNR343-BC/U, BGNR150-BC/U, BGNR250-BC/U, BGNR350-BC/U (при необходимости);
- 11.3. Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с NOBEL REPLACE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZNR135-SC/U, BZNR235-SC/U, BZNR335-SC/U, BZNR135-FC/U, BZNR235-FC/U, BZNR335-FC/U, BZNR143-SC/U, BZNR243-SC/U, BZNR343-SC/U, BZNR143-FC/U, BZNR243-FC/U, BZNR343-FC/U, BZNR150-SC/U, BZNR250-SC/U, BZNR350-SC/U, BZNR150-FC/U, BZNR250-FC/U, BZNR350-FC/U (при необходимости);
- 11.4. Основание титановое (тип 2), совместимо с NOBEL REPLACE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZNR135-BC/U, BZNR235-BC/U, BZNR335-BC/U, BZNR143-BC/U, BZNR243-BC/U, BZNR343-BC/U, BZNR150-BC/U, BZNR250-BC/U, BZNR350-BC/U (при необходимости);
- 11.5. Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с NOBEL REPLACE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BPNR135-A, BPNR135-M, BPNR135-Z, BPNR135-D, BPNR143-A, BPNR143-M, BPNR143-Z, BPNR143-D, BPNR150-A, BPNR150-M, BPNR150-Z, BPNR150-D (при необходимости);
- 11.6. Винт фиксирующий, совместим с NOBEL REPLACE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BSNR135, BSNR143, BSNR150 (при необходимости);
- 11.7. Аналог имплантата лабораторный, совместим с NOBEL REPLACE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BRNR135, BRNR143, BRNR150 (при необходимости);
- 11.8. Инструкция по применению.
12. Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с DENTSPLY XIVE, в составе:
- 12.1. Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с DENTSPLY XIVE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGXF130-SC/U, BGXF130-FC/U, BGXF134-SC/U, BGXF134-FC/U, BGXF138-SC/U, BGXF138-FC/U, BGXF145-SC/U, BGXF145-FC/U, BGXF155-SC/U, BGXF155-FC/U (при необходимости);
- 12.2. Основание титановое (тип 1), совместимо с DENTSPLY XIVE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGXF130-BC/U, BGXF134-BC/U, BGXF138-BC/U, BGXF145-BC/U, BGXF155-BC/U (при необходимости);
- 12.3. Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с DENTSPLY XIVE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZXF130-SC/U, BZXF130-FC/U, BZXF134-SC/U, BZXF134-FC/U, BZXF138-SC/U, BZXF138-FC/U, BZXF145-SC/U, BZXF145-FC/U, BZXF155-SC/U, BZXF155-FC/U (при необходимости);
- 12.4. Основание титановое (тип 2), совместимо с DENTSPLY XIVE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZXF130-BC/U, BZXF134-BC/U, BZXF138-BC/U, BZXF145-BC/U, BZXF155-BC/U (при необходимости);
- 12.5. Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с DENTSPLY XIVE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BPXF130-A, BPXF130-M, BPXF130-Z, BPXF130-D, BPXF134-A, BPXF134-M, BPXF134-Z, BPXF134-D, BPXF138-A, BPXF138-M, BPXF138-Z, BPXF138-D, BPXF145-A, BPXF145-M, BPXF145-Z, BPXF145-D, BPXF155-A, BPXF155-M, BPXF155-Z, BPXF155-D (при необходимости);
- 12.6. Винт фиксирующий, совместим с DENTSPLY XIVE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BSXF130, BSXF134, BSXF138, BSXF145, BSXF155 (при необходимости);

- 12.7. Аналог имплантата лабораторный, совместим с DENTSPLY XIVE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BRXF130, BRXF134, BRXF138, BRXF145, BRXF155 (при необходимости);
- 12.8. Инструкция по применению.
13. Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с DENTSPLY ANKYLOS, в составе:
 - 13.1. Основание титановое (тип 1), совместимо с DENTSPLY ANKYLOS, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGYA135-SC/U, BGYA135-BC/U, BGYA145-SC/U, BGYA145-BC/U, BGYA155-SC/U, BGYA155-BC/U (при необходимости);
 - 13.2. Основание титановое (тип 2), совместимо с DENTSPLY ANKYLOS, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZYA135-SC/U, BZYA135-BC/U, BZYA145-SC/U, BZYA145-BC/U, BZYA155-SC/U, BZYA155-BC/U (при необходимости);
 - 13.3. Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с DENTSPLY ANKYLOS, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BPYA135-A, BPYA135-M, BPYA135-Z, BPYA135-D, BPYA145-A, BPYA145-M, BPYA145-Z, BPYA145-D, BPYA155-A, BPYA155-M, BPYA155-Z, BPYA155-D (при необходимости);
 - 13.4. Аналог имплантата лабораторный, совместим с DENTSPLY ANKYLOS, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BRYA135, BRYA145, BRYA155 (при необходимости);
 - 13.5. Инструкция по применению.
14. Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с BIOMET 3I CERTAIN, в составе:
 - 14.1. Основание титановое (тип 1) восьмигранное, совместимо с BIOMET 3I CERTAIN, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGBC134-SC/U, BGBC134-FC/U, BGBC141-SC/U, BGBC141-FC/U, BGBC150-SC/U, BGBC150-FC/U, BGBC160-SC/U, BGBC160-FC/U (при необходимости);
 - 14.2. Основание титановое (тип 1), совместимо с BIOMET 3I CERTAIN, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGBC134-BC/U, BGBC141-BC/U, BGBC150-BC/U, BGBC160-BC/U (при необходимости);
 - 14.3. Основание титановое (тип 2) восьмигранное, совместимо с BIOMET 3I CERTAIN, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZBC134-SC/U, BZBC134-FC/U, BZBC141-SC/U, BZBC141-FC/U, BZBC150-SC/U, BZBC150-FC/U, BZBC160-SC/U, BZBC160-FC/U (при необходимости);
 - 14.4. Основание титановое (тип 2), совместимо с BIOMET 3I CERTAIN, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZBC134-BC/U, BZBC141-BC/U, BZBC150-BC/U, BZBC160-BC/U (при необходимости);
 - 14.5. Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с BIOMET 3I CERTAIN, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BPBC134-A, BPBC134-M, BPBC134-Z, BPBC134-D, BPBC141-A, BPBC141-M, BPBC141-Z, BPBC141-D, BPBC150-A, BPBC150-M, BPBC150-Z, BPBC150-D, BPBC160-A, BPBC160-M, BPBC160-Z, BPBC160-D (при необходимости);
 - 14.6. Винт фиксирующий, совместим с BIOMET 3I CERTAIN, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BSBC134, BSBC141, BSBC150, BSBC160 (при необходимости);
 - 14.7. Аналог имплантата лабораторный, совместим с BIOMET 3I CERTAIN, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BRBC134, BRBC141, BRBC150, BRBC160 (при необходимости);
 - 14.8. Инструкция по применению.
15. Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с BIOMET 3I OSSEOTITE, в составе:
 - 15.1. Основание титановое (тип 1) восьмигранное, совместимо с BIOMET 3I OSSEOTITE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGBO134-SC/U, BGBO134-FC/U, BGBO141-SC/U, BGBO141-FC/U, BGBO150-SC/U, BGBO150-FC/U, BGBO160-SC/U, BGBO160-FC/U (при необходимости);

- 15.2. Основание титановое (тип 1), совместимо с BIOMET 3I OSSEOTITE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGBO134-BC/U, BGBO141-BC/U, BGBO150-BC/U, BGBO160-BC/U (при необходимости);
- 15.3. Основание титановое (тип 2) восьмигранное, совместимо с BIOMET 3I OSSEOTITE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZBO134-SC/U, BZBO134-FC/U, BZBO141-SC/U, BZBO141-FC/U, BZBO150-SC/U, BZBO150-FC/U, BZBO160-SC/U, BZBO160-FC/U (при необходимости);
- 15.4. Основание титановое (тип 2), совместимо с BIOMET 3I OSSEOTITE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZBO134-BC/U, BZBO141-BC/U, BZBO150-BC/U, BZBO160-BC/U (при необходимости);
- 15.5. Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с BIOMET 3I OSSEOTITE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BPBO134-A, BPBO134-M, BPBO134-Z, BPBO134-D, BPBO141-A, BPBO141-M, BPBO141-Z, BPBO141-D, BPBO150-A, BPBO150-M, BPBO150-Z, BPBO150-D, BPBO160-A, BPBO160-M, BPBO160-Z, BPBO160-D (при необходимости);
- 15.6. Винт фиксирующий, совместим с BIOMET 3I OSSEOTITE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BSBO134, BSBO141, BSBO150, BSBO160 (при необходимости);
- 15.7. Аналог имплантата лабораторный, совместим с BIOMET 3I OSSEOTITE, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BRBO134, BRBO141, BRBO150, BRBO160 (при необходимости);
- 15.8. Инструкция по применению.
16. Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с ZIMMER, в составе:
 - 16.1. Основание титановое (тип 1) восьмигранное, совместимо с ZIMMER, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGZI130-FC/U, BGZI135-SC/U, BGZI135-FC/U, BGZI145-SC/U, BGZI145-FC/U, BGZI157-SC/U, BGZI157-FC/U (при необходимости);
 - 16.2. Основание титановое (тип 1), совместимо с ZIMMER, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGZI135-BC/U, BGZI145-BC/U, BGZI157-BC/U (при необходимости);
 - 16.3. Основание титановое (тип 2) восьмигранное, совместимо с ZIMMER, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZZI130-FC/U, BZZI135-SC/U, BZZI135-FC/U, BZZI145-SC/U, BZZI145-FC/U, BZZI157-SC/U, BZZI157-FC/U (при необходимости);
 - 16.4. Основание титановое (тип 2), совместимо с ZIMMER, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZZI135-BC/U, BZZI145-BC/U, BZZI157-BC/U (при необходимости);
 - 16.5. Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с ZIMMER, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BPZI130-A, BPZI130-M, BPZI130-Z, BPZI130-D, BPZI135-A, BPZI135-M, BPZI135-Z, BPZI135-D, BPZI145-A, BPZI145-M, BPZI145-Z, BPZI145-D, BPZI157-A, BPZI157-M, BPZI157-Z, BPZI157-D (при необходимости);
 - 16.6. Винт фиксирующий, совместим с ZIMMER, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BSZI130, BSZI135, BSZI145, BSZI157 (при необходимости);
 - 16.7. Аналог имплантата лабораторный, совместим с ZIMMER, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BRZI130, BRZI135, BRZI145, BRZI157 (при необходимости);
 - 16.8. Инструкция по применению.
17. Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с ASTRA TECH OSSEOSPEED, в составе:
 - 17.1. Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с ASTRA TECH OSSEOSPEED, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGAO130-SC/U, BGAO230-SC/U, BGAO330-SC/U, BGAO130-FC/U, BGAO230-FC/U, BGAO330-FC/U, BGAO135-SC/U, BGAO235-SC/U, BGAO335-SC/U, BGAO135-FC/U, BGAO235-FC/U, BGAO335-FC/U, BGAO145-SC/U, BGAO245-SC/U, BGAO345-SC/U, BGAO145-FC/U, BGAO245-FC/U, BGAO345-FC/U (при необходимости);
 - 17.2. Основание титановое (тип 1), совместимо с ASTRA TECH OSSEOSPEED, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGAO135-BC/U, BGAO235-BC/U, BGAO335-BC/U, BGAO145-BC/U, BGAO245-BC/U, BGAO345-BC/U (при необходимости);

- 17.3. Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с ASTRA TECH OSSEOSPEED, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZAO130-SC/U, BZAO230-SC/U, BZAO330-SC/U, BZAO130-FC/U, BZAO230-FC/U, BZAO330-FC/U, BZAO135-SC/U, BZAO235-SC/U, BZAO335-SC/U, BZAO135-FC/U, BZAO235-FC/U, BZAO335-FC/U, BZAO145-SC/U, BZAO245-SC/U, BZAO345-SC/U, BZAO145-FC/U, BZAO245-FC/U, BZAO345-FC/U (при необходимости);
- 17.4. Основание титановое (тип 2), совместимо с ASTRA TECH OSSEOSPEED, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZAO135-BC/U, BZAO235-BC/U, BZAO335-BC/U, BZAO145-BC/U, BZAO245-BC/U, BZAO345-BC/U (при необходимости);
- 17.5. Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с ASTRA TECH OSSEOSPEED, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BPAO130-A, BPAO130-M, BPAO130-Z, BPAO130-D, BPAO135-A, BPAO135-M, BPAO135-Z, BPAO135-D, BPAO145-A, BPAO145-M, BPAO145-Z, BPAO145-D (при необходимости);
- 17.6. Винт фиксирующий, совместим с ASTRA TECH OSSEOSPEED, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BSAO130, BSAO135, BSAO145 (при необходимости);
- 17.7. Аналог имплантата лабораторный, совместим с ASTRA TECH OSSEOSPEED, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BRAO130, BRAO135, BRAO145 (при необходимости);
- 17.8. Инструкция по применению.
18. Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с ASTRA EV SYSTEM, в составе:
- 18.1. Основание титановое (тип 1), совместимо с ASTRA EV SYSTEM, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGAE130-SC/U, BGAE230-SC/U, BGAE330-SC/U, BGAE130-BC/U, BGAE230-BC/U, BGAE330-BC/U, BGAE136-SC/U, BGAE236-SC/U, BGAE336-SC/U, BGAE136-BC/U, BGAE236-BC/U, BGAE336-BC/U, BGAE142-SC/U, BGAE242-SC/U, BGAE342-SC/U, BGAE142-BC/U, BGAE242-BC/U, BGAE342-BC/U, BGAE148-SC/U, BGAE248-SC/U, BGAE348-SC/U, BGAE148-BC/U, BGAE248-BC/U, BGAE348-BC/U, BGAE154-SC/U, BGAE254-SC/U, BGAE354-SC/U, BGAE154-BC/U, BGAE254-BC/U, BGAE354-BC/U (при необходимости);
- 18.2. Основание титановое (тип 2), совместимо с ASTRA EV SYSTEM, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZAE130-SC/U, BZAE230-SC/U, BZAE330-SC/U, BZAE130-BC/U, BZAE230-BC/U, BZAE330-BC/U, BZAE136-SC/U, BZAE236-SC/U, BZAE336-SC/U, BZAE136-BC/U, BZAE236-BC/U, BZAE336-BC/U, BZAE142-SC/U, BZAE242-SC/U, BZAE342-SC/U, BZAE142-BC/U, BZAE242-BC/U, BZAE342-BC/U, BZAE148-SC/U, BZAE248-SC/U, BZAE348-SC/U, BZAE148-BC/U, BZAE248-BC/U, BZAE348-BC/U, BZAE154-SC/U, BZAE254-SC/U, BZAE354-SC/U, BZAE154-BC/U, BZAE254-BC/U, BZAE354-BC/U (при необходимости);
- 18.3. Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с ASTRA EV SYSTEM, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BPAE130-A, BPAE130-M, BPAE130-Z, BPAE130-D, BPAE136-A, BPAE136-M, BPAE136-Z, BPAE136-D, BPAE142-A, BPAE142-M, BPAE142-Z, BPAE142-D, BPAE148-A, BPAE148-M, BPAE148-Z, BPAE148-D, BPAE154-A, BPAE154-M, BPAE154-Z, BPAE154-D (при необходимости);
- 18.4. Винт фиксирующий, совместим с ASTRA EV SYSTEM, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BSAE130, BSAE136, BSAE142, BSAE148, BSAE154 (при необходимости);
- 18.5. Аналог имплантата лабораторный, совместим с ASTRA EV SYSTEM, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BRAE130, BRAE136, BRAE142, BRAE148, BRAE154 (при необходимости);
- 18.6. Инструкция по применению.
19. Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с MIS IMPLANT C1, в составе:
- 19.1. Основание титановое (тип 1), совместимо с MIS IMPLANT C1, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGMC133-SC/U, BGMC233-SC/U, BGMC333-SC/U,

- BGMC142-SC/U, BGMC242-SC/U, BGMC342-SC/U, BGMC150-SC/U, BGMC250-SC/U, BGMC350-SC/U (при необходимости);
- 19.2. Основание титановое (тип 2), совместимо с MIS IMPLANT C1, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZMC133-SC/U, BZMC233-SC/U, BZMC333-SC/U, BZMC142-SC/U, BZMC242-SC/U, BZMC342-SC/U, BZMC150-SC/U, BZMC250-SC/U, BZMC350-SC/U (при необходимости);
- 19.3. Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с MIS IMPLANT C1, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BPMC133-A, BPMC133-M, BPMC133-Z, BPMC133-D, BPMC142-A, BPMC142-M, BPMC142-Z, BPMC142-D, BPMC150-A, BPMC150-M, BPMC150-Z, BPMC150-D (при необходимости);
- 19.4. Винт фиксирующий, совместим с MIS IMPLANT C1, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BSMC133, BSMC142, BSMC150 (при необходимости);
- 19.5. Аналог имплантата лабораторный, совместим с MIS IMPLANT C1, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BRMC133, BRMC142, BRMC150 (при необходимости);
- 19.6. Инструкция по применению.
20. Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с MegaGen AnyRidge, в составе:
- 20.1. Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с MegaGen AnyRidge, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGMA137-SC/U, BGMA237-SC/U, BGMA337-SC/U, BGMA137-FC/U, BGMA237-FC/U, BGMA337-FC/U (при необходимости);
- 20.2. Основание титановое (тип 1), совместимо с MegaGen AnyRidge, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGMA137-BC/U, BGMA237-BC/U, BGMA337-BC/U (при необходимости);
- 20.3. Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с MegaGen AnyRidge, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZMA137-SC/U, BZMA237-SC/U, BZMA337-SC/U, BZMA137-FC/U, BZMA237-FC/U, BZMA337-FC/U (при необходимости);
- 20.4. Основание титановое (тип 2), совместимо с MegaGen AnyRidge, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZMA137-BC/U, BZMA237-BC/U, BZMA337-BC/U (при необходимости);
- 20.5. Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с MegaGen AnyRidge, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BPMA137-A, BPMA137-M, BPMA137-Z, BPMA137-D (при необходимости);
- 20.6. Винт фиксирующий, совместим с MegaGen AnyRidge, не более 100 шт.: BSMA135 (при необходимости);
- 20.7. Аналог имплантата лабораторный, совместим с MegaGen AnyRidge, не более 100 шт.: BRMA137 (при необходимости);
- 20.8. Инструкция по применению.
21. Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с ANTHOGRYR AXIOM, в составе:
- 21.1. Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с ANTHOGRYR AXIOM, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGAX154-SC/U, BGAX254-SC/U, BGAX354-SC/U, BGAX154-FC/U, BGAX254-FC/U, BGAX354-FC/U, BGAX155-SC/U, BGAX255-SC/U, BGAX355-SC/U, BGAX155-FC/U, BGAX255-FC/U, BGAX355-FC/U (при необходимости);
- 21.2. Основание титановое (тип 1), совместимо с ANTHOGRYR AXIOM, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BGAX154-BC/U, BGAX254-BC/U, BGAX354-BC/U, BGAX155-BC/U, BGAX255-BC/U, BGAX355-BC/U (при необходимости);
- 21.3. Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с ANTHOGRYR AXIOM, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZAX154-SC/U, BZAX254-SC/U, BZAX354-SC/U, BZAX154-FC/U, BZAX254-FC/U, BZAX354-FC/U, BZAX155-SC/U, BZAX255-SC/U, BZAX355-SC/U, BZAX155-FC/U, BZAX255-FC/U, BZAX355-FC/U (при необходимости);

- 21.4. Основание титановое (тип 2), совместимо с ANTHOGRYR AXIOM, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BZAX154-BC/U, BZAX254-BC/U, BZAX354-BC/U, BZAX155-BC/U, BZAX255-BC/U, BZAX355-BC/U (при необходимости);
- 21.5. Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с ANTHOGRYR AXIOM, в необходимом типоразмере не более 100 шт.: BPAH137-A, BPAH137-M, BPAH137-Z, BPAH137-D (при необходимости);
- 21.6. Винт фиксирующий, совместим с ANTHOGRYR AXIOM, не более 100 шт.: BSAX135 (при необходимости);
- 21.7. Инструкция по применению.

Наименование медицинского изделия «Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, варианты исполнения» далее по тексту – «медицинское изделие», «изделия», «изделия системы».

1.2 Сведения о производителе и уполномоченном представителе

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Биомеханика» (ООО «Биомеханика»)
Россия, 454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 34, пом. 1
Телефон: +7 (351) 751-30-09

Сайт: www.bmcnc.ru

Эл. адрес: porkov@bmcnc.ru

Место производства: Россия, 454112, Челябинская область, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 29

Уполномоченный представитель:

Общество с ограниченной ответственностью «НС Технология» (ООО «НС Технология»)
Россия, 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 26Б, пом. 12, офис 101
Телефон: +7 (351) 701-01-00;
+7 (351) 750-58-75

Сайт: www.nct.dental

Эл. адрес: corp@nct.dental

1.3 Назначение

Изделия системы предназначены для изготовления и установки одно- и многокомпонентной протезной реставрации с опорой на осеоинтегрированные дентальные имплантаты.

1.4 Область применения

Стоматология

1.5 Условия применения

- клинические «стоматологические кабинеты» (для определения процесса лечения, проведения необходимых измерений в ротовой полости пациента и выбора компонентов, а также проведения комплексной дентальной протезной реставрации с опорой на осеоинтегрированные дентальные имплантаты);

- лабораторные «зуботехнические лаборатории» (для изготовления необходимых для проведения комплексной дентальной протезной реставрации компонентов и конструкций).

1.6 Потенциальные потребители медицинского изделия

Потенциальными потребителями медицинского изделия являются пациенты с отсутствующим одним или всеми зубами. Потенциальными пользователями медицинского изделия, в ходе осуществления лечения потенциальных потребителей (вышеупомянутых пациентов) с

указанными в Техническом Файле и в Эксплуатационной Документации показаниями, являются стоматологи-хирурги и стоматологи-ортопеды.

1.7 Показания

Для восстановления эстетики и функциональности зубов у частично или полностью беззубых пациентов, которые уже прошли лечение зубными имплантатами.

1.8 Противопоказания

- Аллергические реакции или сверхчувствительность на химические элементы используемых материалов.
- Инфекционные или воспалительные заболевания ротовой полости.
- Дефекты или нарушения целостности кости.
- Сахарный диабет.

1.9 Рекомендации по применению

- Любой способ дообработки разъёмной геометрии к имплантату ведёт к образованию неточностей прилегания, которые исключают дальнейшее использование.
- Все абатменты, винты, колпачки и основания предусмотрены исключительно для одноразового использования.

1.10 Возможные побочные действия

- В очень редких случаях возможны аллергические реакции и сверхчувствительность в связи с использованием сплавов.
- Разные типы сплавов в ротовой полости могут привести к гальваническим реакциям в случае окклюзального или проксимального контактов.

1.11 Классификация медицинского изделия.

Медицинское изделие относится к классу 2а согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4 н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий».

Код вида медицинского изделия – 120340 «Набор с супраструктурой/абатментов для дентального имплантата».

2. СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

2.1 Перечень исполнений

Медицинское изделие состоит из формирователей десны, абатментов, винтов, оснований, заготовок, имплантовода, тела имплантовода аналогов, трансферов и скан-маркера.

2.3 Комплект поставки

Все изделия поставляются укомплектованными в соответствии с их наименованием в индивидуальной упаковке и таблицей 1.

Таблица 1.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, варианты исполнения:			
1.	Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, в составе:		

№	Наименование	Номенклатура	Количество
1.1.	Формирователь десны (при необходимости)	BHA400020 BHA402020 BHA402035 BHA403050 BHA404070 BHA452020 BHA452035 BHA453050 BHA454070 BHA552020 BHA552035 BHA553050 BHA554070 BHA652020 BHA652035 BHA653050 BHA654070 BHA753050 BHA853050 BHA953050	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
1.2.	Абатмент двойной с шестигранником (при необходимости)	DAL4500SH DAL4500MH DAL4500LH DAL4510SH DAL4510MH DAL4510LH DAL4520SH DAL4520MH DAL4520LH DAL4530SH DAL4530MH DAL4530LH DAL4540SH DAL4540MH DAL4540LH DAL4550SH DAL4550MH DAL4550LH DAL5500SH DAL5500MH DAL5500LH DAL5510SH DAL5510MH DAL5510LH DAL5520SH DAL5520MH DAL5520LH DAL5530SH DAL5530MH DAL5530LH DAL5540SH DAL5540MH DAL5540LH	в необходимом типоразмере не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
		DAL5550SH DAL5550MH DAL5550LH DAL6500SH DAL6500MH DAL6500LH DAL6510SH DAL6510MH DAL6510LH DAL6520SH DAL6520MH DAL6520LH DAL6530SH DAL6530MH DAL6530LH DAL6540SH DAL6540MH DAL6540LH DAL6550SH DAL6550MH DAL6550LH	
1.3.	Абатмент двойной без шестигранника (при необходимости)	DAL4500SN DAL4500MN DAL4500LN DAL4510SN DAL4510MN DAL4510LN DAL4520SN DAL4520MN DAL4520LN DAL4530SN DAL4530MN DAL4530LN DAL4540SN DAL4540MN DAL4540LN DAL4550SN DAL4550MN DAL4550LN DAL5500SN DAL5500MN DAL5500LN DAL5510SN DAL5510MN DAL5510LN DAL5520SN DAL5520MN DAL5520LN DAL5530SN DAL5530MN DAL5530LN DAL5540SN DAL5540MN	в необходимом типоразмере не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
		DAL5540LN DAL5550SN DAL5550MN DAL5550LN DAL6500SN DAL6500MN DAL6500LN DAL6510SN DAL6510MN DAL6510LN DAL6520SN DAL6520MN DAL6520LN DAL6530SN DAL6530MN DAL6530LN DAL6540SN DAL6540MN DAL6540LN DAL6550SN DAL6550MN DAL6550LN	
1.4.	Абатмент временный (при необходимости)	TA4510N TA4520N TA5510N TA5520N	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
1.5.	Абатмент временный шестигранный (при необходимости)	TA4510H TA4520H TA5510H TA5520H	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
1.6.	Абатмент временный мультиюнит (при необходимости)	BSTC45S-N/D BSTC55S-N/D BSTC45B-N/D BSTC55B-N/D	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
1.7.	Абатмент угловой, угол 15° (при необходимости)	ANA450015N ANA451015N ANA452015N ANA453015N ANA454015N ANA550015N ANA551015N ANA552015N ANA553015N ANA554015N	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
1.8.	Абатмент угловой, угол 25° (при необходимости)	ANA450025N ANA451025N ANA452025N ANA453025N ANA454025N ANA550025N ANA551025N ANA552025N ANA553025N	в необходимом типоразмере не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
		ANA554025N	
1.9.	Абатмент угловой шестигранный (тип А), угол 15° (при необходимости)	ANA450015AH ANA451015AH ANA452015AH ANA453015AH ANA454015AH ANA550015AH ANA551015AH ANA552015AH ANA553015AH ANA554015AH	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
1.10.	Абатмент угловой шестигранный (тип А), угол 25° (при необходимости)	ANA450025AH ANA451025AH ANA452025AH ANA453025AH ANA454025AH ANA550025AH ANA551025AH ANA552025AH ANA553025AH ANA554025AH	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
1.11.	Абатмент угловой шестигранный (тип В), угол 15° (при необходимости)	ANA450015BH ANA451015BH ANA452015BH ANA453015BH ANA454015BH ANA550015BH ANA551015BH ANA552015BH ANA553015BH ANA554015BH	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
1.12.	Абатмент угловой шестигранный (тип В), угол 25° (при необходимости)	ANA450025BH ANA451025BH ANA452025BH ANA453025BH ANA454025BH ANA550025BH ANA551025BH ANA552025BH ANA553025BH ANA554025BH	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
1.13.	Абатмент мультиюнит (при необходимости)	BMU0015 BMU0025 BMU0035 BMU0045	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
1.14.	Абатмент угловой мультиюнит, угол 17° (при необходимости)	BMU1725 BMU1735 BMU1745	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
1.15.	Абатмент угловой мультиюнит, угол 30° (при необходимости)	BMU3035 BMU3045	в необходимом типоразмере не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
1.16.	Абатмент угловой мультиюнит, угол 45° (при необходимости)	BMU4535 BMU4545	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
1.17.	Абатмент комбинированный короткий (при необходимости)	BSTBH40 BSTBH42 BSTBH43 BSTBH50 BSTBH52 BSTBH53 BSTBH60 BSTBH62 BSTBH63	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
1.18.	Абатмент комбинированный длинный (при необходимости)	BLTBH40 BLTBH42 BLTBH43 BLTBH50 BLTBH52 BLTBH53 BLTBH60 BLTBH62 BLTBH63	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
1.19.	Абатмент шариковый (при необходимости)	BBAT41	не более 100 шт.
1.20.	Винт фиксирующий мультиюнит (при необходимости)	BSMU2013 BSMU1413	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
1.21.	Винт имплантовода (при необходимости)	BVI001	не более 100 шт.
1.22.	Тело имплантовода (при необходимости)	BTI001	не более 100 шт.
1.23.	Имплантовод в сборе (при необходимости)	BKI001	не более 100 шт.
1.24.	Винт трансфера слепочного для открытой ложки (при необходимости)	BSTR001S BSTR001L	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
1.25.	Винт трансфера слепочного для закрытой ложки (при необходимости)	BSTH001S BSTH001L	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
1.26.	Аналог имплантата лабораторный мультиюнит (при необходимости)	BRMUA4514	не более 100 шт.
1.27.	Аналог для абатмента шарикового (при необходимости)	BBAL40	не более 100 шт.
1.28.	Трансфер слепочный для открытой ложки (при необходимости)	TRO45SN TRO55SN TRO65SN TRO45LN TRO55LN TRO65LN	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
1.29.	Трансфер слепочный для открытой ложки шестигранный (при необходимости)	TRO45SH TRO55SH TRO65SH TRO45LH TRO55LH	в необходимом типоразмере не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
		TRO65LH	
1.30.	Трансфер слепочный для закрытой ложки (при необходимости)	TRC45SN TRC55SN TRC65SN TRC45LN TRC55LN TRC65LN	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
1.31.	Трансфер слепочный для закрытой ложки шестигранный (при необходимости)	TRC45SH TRC55SH TRC65SH TRC45LH TRC55LH TRC65LH	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
1.32.	Инструкция по применению.		
2.	Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с НСТ, в составе:		
2.1.	Формирователь десны, совместим с НСТ (при необходимости)	HA4010i HA4015i HA4020i HA4025i HA4030i HA4035i HA4040i HA4045i HA4050i HA4055i HA4060i HA4065i HA4070i HA4075i HA4080i HA4510i HA4515i HA4520i HA4525i HA4530i HA4535i HA4540i HA4545i HA4550i HA4555i HA4560i HA4565i HA4570i HA4575i HA4580i HA5010i HA5015i HA5020i HA5025i HA5030i HA5035i HA5040i	в необходимом типоразмере не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
		HA5045i HA5050i HA5055i HA5060i HA5065i HA5070i HA5075i HA5080i HA5510i HA5515i HA5520i HA5525i HA5530i HA5535i HA5540i HA5545i HA5550i HA5555i HA5560i HA5565i HA5570i HA5575i HA5580i	
2.2.	Основание титановое (тип 1) шестигранное, dG1 3,5 мм, совместимо с НСТ (при необходимости)	DA4500SH DA4510SH DA4520SH DA4530SH DA4540SH DA4550SH DA4500MH DA4510MH DA4520MH DA4530MH DA4540MH DA4550MH DA4500LH DA4510LH DA4520LH DA4530LH DA4540LH DA4550LH DA5500SH DA5510SH DA5520SH DA5530SH DA5540SH DA5550SH DA5500MH DA5510MH DA5520MH DA5530MH DA5540MH DA5550MH	в необходимом типоразмере не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
		DA5500LH DA5510LH DA5520LH DA5530LH DA5540LH DA5550LH	
2.3.	Основание титановое (тип 1), dG1 3,5 мм, совместимо с НСТ (при необходимости)	DA4500SN DA4510SN DA4520SN DA4530SN DA4540SN DA4550SN DA4500MN DA4510MN DA4520MN DA4530MN DA4540MN DA4550MN DA4500LN DA4510LN DA4520LN DA4530LN DA4540LN DA4550LN DA5500SN DA5510SN DA5520SN DA5530SN DA5540SN DA5550SN DA5500MN DA5510MN DA5520MN DA5530MN DA5540MN DA5550MN DA5500LN DA5510LN DA5520LN DA5530LN DA5540LN DA5550LN	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
2.4.	Основание титановое (тип 1) шестигранное, dG1 3,3 мм, совместимо с НСТ (при необходимости)	DAN4500SH DAN4510SH DAN4520SH DAN4530SH DAN4540SH DAN4550SH DAN4500MH DAN4510MH DAN4520MH DAN4530MH DAN4540MH	в необходимом типоразмере не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
		DAN4550MH DAN4500LH DAN4510LH DAN4520LH DAN4530LH DAN4540LH DAN4550LH	
2.5.	Основание титановое (тип 1), dG1 3,3 мм, совместимо с НСТ (при необходимости)	DAN4500SN DAN4510SN DAN4520SN DAN4530SN DAN4540SN DAN4550SN DAN4500MN DAN4510MN DAN4520MN DAN4530MN DAN4540MN DAN4550MN DAN4500LN DAN4510LN DAN4520LN DAN4530LN DAN4540LN DAN4550LN	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
2.6.	Основание титановое (тип 1) шестигранное, dG1 3,2 мм, совместимо с НСТ (при необходимости)	TiB4001SH TiB4002SH TiB4003SH TiB5001SH TiB5002SH TiB5003SH TiB6001SH TiB6002SH TiB6003SH TiB4001LH TiB4002LH TiB4003LH TiB5001LH TiB5002LH TiB5003LH TiB6001LH TiB6002LH TiB6003LH	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
2.7.	Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с НСТ (при необходимости)	TiB10 TiB12 TiB14 TiB10N TiB12N TiB14N	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
2.8.	Винт фиксирующий, совместим с НСТ (при необходимости)	SC2585 SC2285 SC2275 SC2265	в необходимом типоразмере не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
2.9.	Аналог имплантата лабораторный, совместим с НСТ (при необходимости)	BRN001	не более 100 шт.
2.10.	Скан-маркер НСТ (при необходимости)	SM438	не более 100 шт.
2.11.	Инструкция по применению.		
3.	Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с ANK, в составе:		
3.1.	Формирователь десны, совместим с ANK (при необходимости)	HA15Sa HA30Sa HA15La HA30La	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
3.2.	Инструкция по применению.		
4.	Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с STM, в составе:		
4.1.	Формирователь десны, совместим с STM (при необходимости)	HA4010st HA4015st HA4020st HA4025st HA4030st HA4035st HA4040st HA4045st HA4050st HA4055st HA4060st HA4065st HA4070st HA4075st HA4080st HA4510st HA4515st HA4520st HA4525st HA4530st HA4535st HA4540st HA4545st HA4550st HA4555st HA4560st HA4565st HA4570st HA4575st HA4580st HA5010st HA5015st HA5020st HA5025st HA5030st HA5035st HA5040st HA5045st HA5050st	в необходимом типоразмере не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
		HA5055st HA5060st HA5065st HA5070st HA5075st HA5080st HA5510st HA5515st HA5520st HA5525st HA5530st HA5535st HA5540st HA5545st HA5550st HA5555st HA5560st HA5565st HA5570st HA5575st HA5580st	
4.2.	Инструкция по применению.		
5.	Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с OSSTEM IMPLANT TS, в составе:		
5.1.	Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с OSSTEM IMPLANT TS (при необходимости)	BGOM135-SC/U BGOM235-SC/U BGOM335-SC/U BGOM135-FC/U BGOM235-FC/U BGOM335-FC/U BGOR140-SC/U BGOR240-SC/U BGOR340-SC/U BGOR140-FC/U BGOR240-FC/U BGOR340-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
5.2.	Основание титановое (тип 1), совместимо с OSSTEM IMPLANT TS (при необходимости)	BGOM135-BC/U BGOM235-BC/U BGOM335-BC/U BGOR140-BC/U BGOR240-BC/U BGOR340-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
5.3.	Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с OSSTEM IMPLANT TS (при необходимости)	BZOM135-SC/U BZOM235-SC/U BZOM335-SC/U BZOM135-FC/U BZOM235-FC/U BZOM335-FC/U BZOR140-SC/U BZOR240-SC/U BZOR340-SC/U BZOR140-FC/U BZOR240-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
		BZOR340-FC/U	
5.4.	Основание титановое (тип 2), совместимо с OSSTEM IMPLANT TS (при необходимости)	BZOM135-BC/U BZOM235-BC/U BZOM335-BC/U BZOR140-BC/U BZOR240-BC/U BZOR340-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
5.5.	Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с OSSTEM IMPLANT TS (при необходимости)	BPOM135-A BPOM135-M BPOM135-Z BPOM135-D BPOR135-A BPOR135-M BPOR135-Z BPOR135-D	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
5.6.	Винт фиксирующий, совместим с OSSTEM IMPLANT TS (при необходимости)	BSOM135 BSOR140	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
5.7.	Аналог имплантата лабораторный, совместим с OSSTEM IMPLANT TS (при необходимости)	BROM135 BROR135	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
5.8.	Инструкция по применению.		
6.	Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с DENTIUM SUPERLINE, в составе:		
6.1.	Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с DENTIUM SUPERLINE (при необходимости)	BGDI137-SC/U BGDI237-SC/U BGDI337-SC/U BGDI137-FC/U BGDI237-FC/U BGDI337-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
6.2.	Основание титановое (тип 1), совместимо с DENTIUM SUPERLINE (при необходимости)	BGDI137-BC/U BGDI237-BC/U BGDI337-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
6.3.	Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с DENTIUM SUPERLINE (при необходимости)	BZDI137-SC/U BZDI237-SC/U BZDI337-SC/U BZDI137-FC/U BZDI237-FC/U BZDI337-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
6.4.	Основание титановое (тип 2), совместимо с DENTIUM SUPERLINE (при необходимости)	BZDI137-BC/U BZDI237-BC/U BZDI337-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
6.5.	Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с DENTIUM SUPERLINE (при необходимости)	BPDI137-A BPDI137-M BPDI137-Z BPDI137-D BPDI237-A BPDI237-M BPDI237-Z BPDI237-D	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
6.6.	Винт фиксирующий, совместим с DENTIUM SUPERLINE (при необходимости)	BSDI137/237	не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
6.7.	Аналог имплантата лабораторный, совместим с DENTIUM SUPERLINE (при необходимости)	BRDI137 BRDI237	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
6.8.	Инструкция по применению.		
7.	Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с STRAUMANN BONE LEVEL, в составе:		
7.1.	Основание титановое (тип 1), совместимо с STRAUMANN BONE LEVEL (при необходимости)	BGSB133-SC/U BGSB233-SC/U BGSB333-SC/U BGSB133-BC/U BGSB233-BC/U BGSB333-BC/U BGSB133-FC/U BGSB233-FC/U BGSB333-FC/U BGSB141-SC/U BGSB241-SC/U BGSB341-SC/U BGSB141-BC/U BGSB241-BC/U BGSB341-BC/U BGSB141-FC/U BGSB241-FC/U BGSB341-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
7.2.	Основание титановое (тип 2), совместимо с STRAUMANN BONE LEVEL (при необходимости)	BZSB133-SC/U BZSB233-SC/U BZSB333-SC/U BZSB133-BC/U BZSB233-BC/U BZSB333-BC/U BZSB133-FC/U BZSB233-FC/U BZSB333-FC/U BZSB141-SC/U BZSB241-SC/U BZSB341-SC/U BZSB141-BC/U BZSB241-BC/U BZSB341-BC/U BZSB141-FC/U BZSB241-FC/U BZSB341-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
7.3.	Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с STRAUMANN BONE LEVEL (при необходимости)	BPSB133-A BPSB133-M BPSB133-Z BPSB133-D BPSB141-A BPSB141-M BPSB141-Z BPSB141-D	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
7.4.	Винт фиксирующий, совместим с STRAUMANN BONE LEVEL (при необходимости)	BSSB133/141	не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
7.5.	Аналог имплантата лабораторный, совместим с STRAUMANN BONE LEVEL (при необходимости)	BRSB133 BRSB141	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
7.6.	Инструкция по применению.		
8.	Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с STRAUMANN TISSUE LEVEL, в составе:		
8.1.	Основание титановое (тип 1) восьмигранное, совместимо с STRAUMANN TISSUE LEVEL (при необходимости)	BGST148-SC/U BGST248-SC/U BGST348-SC/U BGST148-RC/U BGST248-RC/U BGST348-RC/U BGST165-SC/U BGST265-SC/U BGST365-SC/U BGST165-RC/U BGST265-RC/U BGST365-RC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
8.2.	Основание титановое (тип 1), совместимо с STRAUMANN TISSUE LEVEL (при необходимости)	BGST148-BC/U BGST248-BC/U BGST348-BC/U BGST165-BC/U BGST265-BC/U BGST365-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
8.3.	Основание титановое (тип 2) восьмигранное, совместимо с STRAUMANN TISSUE LEVEL (при необходимости)	BZST148-SC/U BZST248-SC/U BZST348-SC/U BZST148-RC/U BZST248-RC/U BZST348-RC/U BZST165-SC/U BZST265-SC/U BZST365-SC/U BZST165-RC/U BZST265-RC/U BZST365-RC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
8.4.	Основание титановое (тип 2), совместимо с STRAUMANN TISSUE LEVEL (при необходимости)	BZST148-BC/U BZST248-BC/U BZST348-BC/U BZST165-BC/U BZST265-BC/U BZST365-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
8.5.	Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с STRAUMANN TISSUE LEVEL (при необходимости)	BPST148-A BPST148-M BPST148-Z BPST148-D BPST165-A BPST165-M BPST165-Z BPST165-D	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
8.6.	Винт фиксирующий, совместим с STRAUMANN TISSUE LEVEL (при необходимости)	BSST148 BSST165	в необходимом типоразмере не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
8.7.	Аналог имплантата лабораторный, совместим с STRAUMANN TISSUE LEVEL (при необходимости)	BRST148 BRST165	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
8.8.	Инструкция по применению.		
9.	Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с NOBEL BIOCARE ACTIVE, в составе:		
9.1.	Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с NOBEL BIOCARE ACTIVE (при необходимости)	BGNA135-SC/U BGNA235-SC/U BGNA335-SC/U BGNA135-FC/U BGNA235-FC/U BGNA335-FC/U BGNA143-SC/U BGNA243-SC/U BGNA343-SC/U BGNA143-FC/U BGNA243-FC/U BGNA343-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
9.2.	Основание титановое (тип 1), совместимо с NOBEL BIOCARE ACTIVE (при необходимости)	BGNA135-BC/U BGNA235-BC/U BGNA335-BC/U BGNA143-BC/U BGNA243-BC/U BGNA343-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
9.3.	Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с NOBEL BIOCARE ACTIVE (при необходимости)	BZNA135-SC/U BZNA235-SC/U BZNA335-SC/U BZNA135-FC/U BZNA235-FC/U BZNA335-FC/U BZNA143-SC/U BZNA243-SC/U BZNA343-SC/U BZNA143-FC/U BZNA243-FC/U BZNA343-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
9.4.	Основание титановое (тип 2), совместимо с NOBEL BIOCARE ACTIVE (при необходимости)	BZNA135-BC/U BZNA235-BC/U BZNA335-BC/U BZNA143-BC/U BZNA243-BC/U BZNA343-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
9.5.	Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с NOBEL BIOCARE ACTIVE (при необходимости)	BPNA135-A BPNA135-M BPNA135-Z BPNA135-D BPNA143-A BPNA143-M BPNA143-Z BPNA143-D	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
9.6.	Винт фиксирующий, совместим с NOBEL BIOCARE ACTIVE (при необходимости)	BSNA135 BSNA143	в необходимом типоразмере не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
9.7.	Аналог имплантата лабораторный, совместим с NOBEL BIO CARE ACTIVE (при необходимости)	BRNA135 BRNA143	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
9.8.	Инструкция по применению.		
10.	Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с NOBEL BRANEMARK, в составе:		
10.1.	Основание титановое (тип 1) восьмигранное, совместимо с NOBEL BRANEMARK (при необходимости)	BGNB135-SC/U BGNB235-SC/U BGNB335-SC/U BGNB135-FC/U BGNB235-FC/U BGNB335-FC/U BGNB141-SC/U BGNB241-SC/U BGNB341-SC/U BGNB141-FC/U BGNB241-FC/U BGNB341-FC/U BGNB151-SC/U BGNB251-SC/U BGNB351-SC/U BGNB151-FC/U BGNB251-FC/U BGNB351-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
10.2.	Основание титановое (тип 1), совместимо с NOBEL BRANEMARK (при необходимости)	BGNB135-BC/U BGNB235-BC/U BGNB335-BC/U BGNB141-BC/U BGNB241-BC/U BGNB341-BC/U BGNB151-BC/U BGNB251-BC/U BGNB351-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
10.3.	Основание титановое (тип 2) восьмигранное, совместимо с NOBEL BRANEMARK (при необходимости)	BZNB135-SC/U BZNB235-SC/U BZNB335-SC/U BZNB135-FC/U BZNB235-FC/U BZNB335-FC/U BZNB141-SC/U BZNB241-SC/U BZNB341-SC/U BZNB141-FC/U BZNB241-FC/U BZNB341-FC/U BZNB151-SC/U BZNB251-SC/U BZNB351-SC/U BZNB151-FC/U BZNB251-FC/U BZNB351-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
10.4.	Основание титановое (тип 2), совместимо с NOBEL BRANEMARK (при необходимости)	BZNB135-BC/U BZNB235-BC/U BZNB335-BC/U BZNB141-BC/U BZNB241-BC/U BZNB341-BC/U BZNB151-BC/U BZNB251-BC/U BZNB351-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
10.5.	Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с NOBEL BRANEMARK (при необходимости)	BPNB135-A BPNB135-M BPNB135-Z BPNB135-D BPNB141-A BPNB141-M BPNB141-Z BPNB141-D BPNB151-A BPNB151-M BPNB151-Z BPNB151-D	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
10.6.	Винт фиксирующий, совместим с NOBEL BRANEMARK (при необходимости)	BSNB135 BSNB141 BSNB151	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
10.7.	Аналог имплантата лабораторный, совместим с NOBEL BRANEMARK (при необходимости)	BRNB135 BRNB141 BRNB151	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
10.8.	Инструкция по применению.		
11.	Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с NOBEL REPLACE, в составе:		
11.1.	Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с NOBEL REPLACE (при необходимости)	BGNR135-SC/U BGNR235-SC/U BGNR335-SC/U BGNR135-FC/U BGNR235-FC/U BGNR335-FC/U BGNR143-SC/U BGNR243-SC/U BGNR343-SC/U BGNR143-FC/U BGNR243-FC/U BGNR343-FC/U BGNR150-SC/U BGNR250-SC/U BGNR350-SC/U BGNR150-FC/U BGNR250-FC/U BGNR350-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
11.2.	Основание титановое (тип 1), совместимо с NOBEL REPLACE (при необходимости)	BGNR135-BC/U BGNR235-BC/U BGNR335-BC/U BGNR143-BC/U BGNR243-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
		BGNR343-BC/U BGNR150-BC/U BGNR250-BC/U BGNR350-BC/U	
11.3.	Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с NOBEL REPLACE (при необходимости)	BZNR135-SC/U BZNR235-SC/U BZNR335-SC/U BZNR135-FC/U BZNR235-FC/U BZNR335-FC/U BZNR143-SC/U BZNR243-SC/U BZNR343-SC/U BZNR143-FC/U BZNR243-FC/U BZNR343-FC/U BZNR150-SC/U BZNR250-SC/U BZNR350-SC/U BZNR150-FC/U BZNR250-FC/U BZNR350-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
11.4.	Основание титановое (тип 2), совместимо с NOBEL REPLACE (при необходимости)	BZNR135-BC/U BZNR235-BC/U BZNR335-BC/U BZNR143-BC/U BZNR243-BC/U BZNR343-BC/U BZNR150-BC/U BZNR250-BC/U BZNR350-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
11.5.	Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с NOBEL REPLACE (при необходимости)	BPNR135-A BPNR135-M BPNR135-Z BPNR135-D BPNR143-A BPNR143-M BPNR143-Z BPNR143-D BPNR150-A BPNR150-M BPNR150-Z BPNR150-D	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
11.6.	Винт фиксирующий, совместим с NOBEL REPLACE (при необходимости)	BSNR135 BSNR143 BSNR150	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
11.7.	Аналог имплантата лабораторный, совместим с NOBEL REPLACE (при необходимости)	BRNR135 BRNR143 BRNR150	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
11.8.	Инструкция по применению.		
12.	Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с DENTSPLY XIVE, в составе:		

№	Наименование	Номенклатура	Количество
12.1.	Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с DENTSPLY XIVE (при необходимости)	BGXF130-SC/U BGXF130-FC/U BGXF134-SC/U BGXF134-FC/U BGXF138-SC/U BGXF138-FC/U BGXF145-SC/U BGXF145-FC/U BGXF155-SC/U BGXF155-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
12.2.	Основание титановое (тип 1), совместимо с DENTSPLY XIVE (при необходимости)	BGXF130-BC/U BGXF134-BC/U BGXF138-BC/U BGXF145-BC/U BGXF155-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
12.3.	Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с DENTSPLY XIVE (при необходимости)	BZXF130-SC/U BZXF130-FC/U BZXF134-SC/U BZXF134-FC/U BZXF138-SC/U BZXF138-FC/U BZXF145-SC/U BZXF145-FC/U BZXF155-SC/U BZXF155-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
12.4.	Основание титановое (тип 2), совместимо с DENTSPLY XIVE (при необходимости)	BZXF130-BC/U BZXF134-BC/U BZXF138-BC/U BZXF145-BC/U BZXF155-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
12.5.	Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с DENTSPLY XIVE (при необходимости)	BPXF130-A BPXF130-M BPXF130-Z BPXF130-D BPXF134-A BPXF134-M BPXF134-Z BPXF134-D BPXF138-A BPXF138-M BPXF138-Z BPXF138-D BPXF145-A BPXF145-M BPXF145-Z BPXF145-D BPXF155-A BPXF155-M BPXF155-Z BPXF155-D	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
12.6.	Винт фиксирующий, совместим с DENTSPLY XIVE (при необходимости)	BSXF130 BSXF134 BSXF138	в необходимом типоразмере не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
		BSXF145 BSXF155	
12.7.	Аналог имплантата лабораторный, совместим с DENTSPLY XIVE (при необходимости)	BRXF130 BRXF134 BRXF138 BRXF145 BRXF155	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
12.8.	Инструкция по применению.		
13.	Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с DENTSPLY ANKYLOS, в составе:		
13.1.	Основание титановое (тип 1), совместимо с DENTSPLY ANKYLOS (при необходимости)	BGYA135-SC/U BGYA135-BC/U BGYA145-SC/U BGYA145-BC/U BGYA155-SC/U BGYA155-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
13.2.	Основание титановое (тип 2), совместимо с DENTSPLY ANKYLOS (при необходимости)	BZYA135-SC/U BZYA135-BC/U BZYA145-SC/U BZYA145-BC/U BZYA155-SC/U BZYA155-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
13.3.	Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с DENTSPLY ANKYLOS (при необходимости)	BPYA135-A BPYA135-M BPYA135-Z BPYA135-D BPYA145-A BPYA145-M BPYA145-Z BPYA145-D BPYA155-A BPYA155-M BPYA155-Z BPYA155-D	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
13.4.	Аналог имплантата лабораторный, совместим с DENTSPLY ANKYLOS (при необходимости)	BRYA135 BRYA145 BRYA155	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
13.5.	Инструкция по применению.		
14.	Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с BIOMET 3I CERTAIN, в составе:		
14.1.	Основание титановое (тип 1) восьмигранное, совместимо с BIOMET 3I CERTAIN (при необходимости)	BGBC134-SC/U BGBC134-FC/U BGBC141-SC/U BGBC141-FC/U BGBC150-SC/U BGBC150-FC/U BGBC160-SC/U BGBC160-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
14.2.	Основание титановое (тип 1), совместимо с BIOMET 3I CERTAIN (при необходимости)	BGBC134-BC/U BGBC141-BC/U BGBC150-BC/U BGBC160-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
14.3.	Основание титановое (тип 2) восьмигранное, совместимо с BIOMET 3I CERTAIN (при необходимости)	BZBC134-SC/U BZBC134-FC/U BZBC141-SC/U BZBC141-FC/U BZBC150-SC/U BZBC150-FC/U BZBC160-SC/U BZBC160-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
14.4.	Основание титановое (тип 2), совместимо с BIOMET 3I CERTAIN (при необходимости)	BZBC134-BC/U BZBC141-BC/U BZBC150-BC/U BZBC160-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
14.5.	Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с BIOMET 3I CERTAIN (при необходимости)	BPBC134-A BPBC134-M BPBC134-Z BPBC134-D BPBC141-A BPBC141-M BPBC141-Z BPBC141-D BPBC150-A BPBC150-M BPBC150-Z BPBC150-D BPBC160-A BPBC160-M BPBC160-Z BPBC160-D	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
14.6.	Винт фиксирующий, совместим с BIOMET 3I CERTAIN (при необходимости)	BSBC134 BSBC141 BSBC150 BSBC160	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
14.7.	Аналог имплантата лабораторный, совместим с BIOMET 3I CERTAIN (при необходимости)	BRBC134 BRBC141 BRBC150 BRBC160	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
14.8.	Инструкция по применению.		
15.	Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с BIOMET 3I OSSEOTITE, в составе:		
15.1.	Основание титановое (тип 1) восьмигранное, совместимо с BIOMET 3I OSSEOTITE (при необходимости)	BGBO134-SC/U BGBO134-FC/U BGBO141-SC/U BGBO141-FC/U BGBO150-SC/U BGBO150-FC/U BGBO160-SC/U BGBO160-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
15.2.	Основание титановое (тип 1), совместимо с BIOMET 3I OSSEOTITE (при необходимости)	BGBO134-BC/U BGBO141-BC/U BGBO150-BC/U BGBO160-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
15.3.	Основание титановое (тип 2) восьмигранное, совместимо с BIOMET 3I OSSEOTITE (при необходимости)	BZBO134-SC/U BZBO134-FC/U BZBO141-SC/U BZBO141-FC/U BZBO150-SC/U BZBO150-FC/U BZBO160-SC/U BZBO160-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
15.4.	Основание титановое (тип 2), совместимо с BIOMET 3I OSSEOTITE (при необходимости)	BZBO134-BC/U BZBO141-BC/U BZBO150-BC/U BZBO160-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
15.5.	Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с BIOMET 3I OSSEOTITE (при необходимости)	BPBO134-A BPBO134-M BPBO134-Z BPBO134-D BPBO141-A BPBO141-M BPBO141-Z BPBO141-D BPBO150-A BPBO150-M BPBO150-Z BPBO150-D BPBO160-A BPBO160-M BPBO160-Z BPBO160-D	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
15.6.	Винт фиксирующий, совместим с BIOMET 3I OSSEOTITE (при необходимости)	BSBO134 BSBO141 BSBO150 BSBO160	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
15.7.	Аналог имплантата лабораторный, совместим с BIOMET 3I OSSEOTITE (при необходимости)	BRBO134 BRBO141 BRBO150 BRBO160	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
15.8.	Инструкция по применению.		
16.	Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с ZIMMER, в составе:		
16.1.	Основание титановое (тип 1) восьмигранное, совместимо с ZIMMER (при необходимости)	BGZI130-FC/U BGZI135-SC/U BGZI135-FC/U BGZI145-SC/U BGZI145-FC/U BGZI157-SC/U BGZI157-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
16.2.	Основание титановое (тип 1), совместимо с ZIMMER (при необходимости)	BGZI135-BC/U BGZI145-BC/U BGZI157-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
16.3.	Основание титановое (тип 2) восьмигранное, совместимо с ZIMMER (при необходимости)	BZZI130-FC/U BZZI135-SC/U BZZI135-FC/U BZZI145-SC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
		BZZI145-FC/U BZZI157-SC/U BZZI157-FC/U	
16.4.	Основание титановое (тип 2), совместимо с ZIMMER (при необходимости)	BZZI135-BC/U BZZI145-BC/U BZZI157-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
16.5.	Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с ZIMMER (при необходимости)	BPZI130-A BPZI130-M BPZI130-Z BPZI130-D BPZI135-A BPZI135-M BPZI135-Z BPZI135-D BPZI145-A BPZI145-M BPZI145-Z BPZI145-D BPZI157-A BPZI157-M BPZI157-Z BPZI157-D	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
16.6.	Винт фиксирующий, совместим с ZIMMER (при необходимости)	BSZI130 BSZI135 BSZI145 BSZI157	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
16.7.	Аналог имплантата лабораторный, совместим с ZIMMER (при необходимости)	BRZI130 BRZI135 BRZI145 BRZI157	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
16.8.	Инструкция по применению.		
17.	Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с ASTRA TECH OSSEOSPEED, в составе:		
17.1.	Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с ASTRA TECH OSSEOSPEED (при необходимости)	BGAO130-SC/U BGAO230-SC/U BGAO330-SC/U BGAO130-FC/U BGAO230-FC/U BGAO330-FC/U BGAO135-SC/U BGAO235-SC/U BGAO335-SC/U BGAO135-FC/U BGAO235-FC/U BGAO335-FC/U BGAO145-SC/U BGAO245-SC/U BGAO345-SC/U BGAO145-FC/U BGAO245-FC/U BGAO345-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
17.2.	Основание титановое (тип 1), совместимо с ASTRA TECH OSSEOSPEED (при необходимости)	BGAO135-BC/U BGAO235-BC/U BGAO335-BC/U BGAO145-BC/U BGAO245-BC/U BGAO345-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
17.3.	Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с ASTRA TECH OSSEOSPEED (при необходимости)	BZAO130-SC/U BZAO230-SC/U BZAO330-SC/U BZAO130-FC/U BZAO230-FC/U BZAO330-FC/U BZAO135-SC/U BZAO235-SC/U BZAO335-SC/U BZAO135-FC/U BZAO235-FC/U BZAO335-FC/U BZAO145-SC/U BZAO245-SC/U BZAO345-SC/U BZAO145-FC/U BZAO245-FC/U BZAO345-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
17.4.	Основание титановое (тип 2), совместимо с ASTRA TECH OSSEOSPEED (при необходимости)	BZAO135-BC/U BZAO235-BC/U BZAO335-BC/U BZAO145-BC/U BZAO245-BC/U BZAO345-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
17.5.	Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с ASTRA TECH OSSEOSPEED (при необходимости)	BPAO130-A BPAO130-M BPAO130-Z BPAO130-D BPAO135-A BPAO135-M BPAO135-Z BPAO135-D BPAO145-A BPAO145-M BPAO145-Z BPAO145-D	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
17.6.	Винт фиксирующий, совместим с ASTRA TECH OSSEOSPEED (при необходимости)	BSAO130 BSAO135 BSAO145	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
17.7.	Аналог имплантата лабораторный, совместим с ASTRA TECH OSSEOSPEED (при необходимости)	BRAO130 BRAO135 BRAO145	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
17.8.	Инструкция по применению.		
18.	Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с ASTRA EV SYSTEM, в составе:		

№	Наименование	Номенклатура	Количество
18.1.	Основание титановое (тип 1), совместимо с ASTRA EV SYSTEM (при необходимости)	BGAE130-SC/U BGAE230-SC/U BGAE330-SC/U BGAE130-BC/U BGAE230-BC/U BGAE330-BC/U BGAE136-SC/U BGAE236-SC/U BGAE336-SC/U BGAE136-BC/U BGAE236-BC/U BGAE336-BC/U BGAE142-SC/U BGAE242-SC/U BGAE342-SC/U BGAE142-BC/U BGAE242-BC/U BGAE342-BC/U BGAE148-SC/U BGAE248-SC/U BGAE348-SC/U BGAE148-BC/U BGAE248-BC/U BGAE348-BC/U BGAE154-SC/U BGAE254-SC/U BGAE354-SC/U BGAE154-BC/U BGAE254-BC/U BGAE354-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
18.2.	Основание титановое (тип 2), совместимо с ASTRA EV SYSTEM (при необходимости)	BZAE130-SC/U BZAE230-SC/U BZAE330-SC/U BZAE130-BC/U BZAE230-BC/U BZAE330-BC/U BZAE136-SC/U BZAE236-SC/U BZAE336-SC/U BZAE136-BC/U BZAE236-BC/U BZAE336-BC/U BZAE142-SC/U BZAE242-SC/U BZAE342-SC/U BZAE142-BC/U BZAE242-BC/U BZAE342-BC/U BZAE148-SC/U BZAE248-SC/U BZAE348-SC/U BZAE148-BC/U BZAE248-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
		BZAE348-BC/U BZAE154-SC/U BZAE254-SC/U BZAE354-SC/U BZAE154-BC/U BZAE254-BC/U BZAE354-BC/U	
18.3.	Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с ASTRA EV SYSTEM (при необходимости)	BPAE130-A BPAE130-M BPAE130-Z BPAE130-D BPAE136-A BPAE136-M BPAE136-Z BPAE136-D BPAE142-A BPAE142-M BPAE142-Z BPAE142-D BPAE148-A BPAE148-M BPAE148-Z BPAE148-D BPAE154-A BPAE154-M BPAE154-Z BPAE154-D	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
18.4.	Винт фиксирующий, совместим с ASTRA EV SYSTEM (при необходимости)	BSAE130 BSAE136 BSAE142 BSAE148 BSAE154	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
18.5.	Аналог имплантата лабораторный, совместим с ASTRA EV SYSTEM (при необходимости)	BRAE130 BRAE136 BRAE142 BRAE148 BRAE154	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
18.6.	Инструкция по применению.		
19.	Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с MIS IMPLANT C1, в составе:		
19.1.	Основание титановое (тип 1), совместимо с MIS IMPLANT C1 (при необходимости)	BGMC133-SC/U BGMC233-SC/U BGMC333-SC/U BGMC142-SC/U BGMC242-SC/U BGMC342-SC/U BGMC150-SC/U BGMC250-SC/U BGMC350-SC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
19.2.	Основание титановое (тип 2), совместимо с MIS IMPLANT C1 (при необходимости)	BZMC133-SC/U BZMC233-SC/U BZMC333-SC/U BZMC142-SC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.

№	Наименование	Номенклатура	Количество
		BZMC242-SC/U BZMC342-SC/U BZMC150-SC/U BZMC250-SC/U BZMC350-SC/U	
19.3.	Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с MIS IMPLANT C1 (при необходимости)	BPMC133-A BPMC133-M BPMC133-Z BPMC133-D BPMC142-A BPMC142-M BPMC142-Z BPMC142-D BPMC150-A BPMC150-M BPMC150-Z BPMC150-D	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
19.4.	Винт фиксирующий, совместим с MIS IMPLANT C1 (при необходимости)	BSMC133 BSMC142 BSMC150	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
19.5.	Аналог имплантата лабораторный, совместим с MIS IMPLANT C1 (при необходимости)	BRMC133 BRMC142 BRMC150	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
19.6.	Инструкция по применению.		
20.	Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с MegaGen AnyRidge, в составе:		
20.1.	Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с MegaGen AnyRidge (при необходимости)	BGMA137-SC/U BGMA237-SC/U BGMA337-SC/U BGMA137-FC/U BGMA237-FC/U BGMA337-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
20.2.	Основание титановое (тип 1), совместимо с MegaGen AnyRidge (при необходимости)	BGMA137-BC/U BGMA237-BC/U BGMA337-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
20.3.	Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с MegaGen AnyRidge (при необходимости)	BZMA137-SC/U BZMA237-SC/U BZMA337-SC/U BZMA137-FC/U BZMA237-FC/U BZMA337-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
20.4.	Основание титановое (тип 2), совместимо с MegaGen AnyRidge (при необходимости)	BZMA137-BC/U BZMA237-BC/U BZMA337-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
20.5.	Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с MegaGen AnyRidge (при необходимости)	BPMA137-A BPMA137-M BPMA137-Z BPMA137-D	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
20.6.	Винт фиксирующий, совместим с MegaGen AnyRidge (при необходимости)	BSMA135	не более 100 шт.
20.7.	Аналог имплантата лабораторный, совместим с MegaGen AnyRidge (при необходимости)	BRMA137	не более 100 шт.
20.8.	Инструкция по применению.		

№	Наименование	Номенклатура	Количество
21.	Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, совместимая с ANTHOGR AXIOM, в составе:		
21.1.	Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с ANTHOGR AXIOM (при необходимости)	BGAX154-SC/U BGAX254-SC/U BGAX354-SC/U BGAX154-FC/U BGAX254-FC/U BGAX354-FC/U BGAX155-SC/U BGAX255-SC/U BGAX355-SC/U BGAX155-FC/U BGAX255-FC/U BGAX355-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
21.2.	Основание титановое (тип 1), совместимо с ANTHOGR AXIOM (при необходимости)	BGAX154-BC/U BGAX254-BC/U BGAX354-BC/U BGAX155-BC/U BGAX255-BC/U BGAX355-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
21.3.	Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с ANTHOGR AXIOM (при необходимости)	BZAX154-SC/U BZAX254-SC/U BZAX354-SC/U BZAX154-FC/U BZAX254-FC/U BZAX354-FC/U BZAX155-SC/U BZAX255-SC/U BZAX355-SC/U BZAX155-FC/U BZAX255-FC/U BZAX355-FC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
21.4.	Основание титановое (тип 2), совместимо с ANTHOGR AXIOM (при необходимости)	BZAX154-BC/U BZAX254-BC/U BZAX354-BC/U BZAX155-BC/U BZAX255-BC/U BZAX355-BC/U	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
21.5.	Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с ANTHOGR AXIOM (при необходимости)	BPAX137-A BPAX137-M BPAX137-Z BPAX137-D	в необходимом типоразмере не более 100 шт.
21.6.	Винт фиксирующий, совместим с ANTHOGR AXIOM (при необходимости)	BSAX135	не более 100 шт.
21.7.	Инструкция по применению.		

Примечание: комплект поставки, определяется по требованию заказчика. Каждое изделие выбранного варианта исполнения имеет индивидуальную упаковку.

2.4 Перечень материалов животного и (или) человеческого происхождения.

Изделие не содержит материалов животного и (или) человеческого происхождения.

2.5 Информация о лекарственных препаратах и (или) фармацевтических субстанциях входящих в состав медицинского изделия.

Изделие не содержит лекарственных средств.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Изделия при эксплуатации устойчивы к температуре от 32 до 42°C.

Медицинское изделие представляет собой различные варианты исполнения абатментов, винтов, оснований, а также принадлежностей к ним, которые в совокупности предоставляют возможность лечащему врачу и стоматологу восстановить эстетику и функциональность зубов у частично или полностью беззубого пациента, который уже прошёл лечение зубными имплантатами и их приживление полностью завершено.

Изделия системы протетической для стоматологических имплантатов, произведённые компанией «Биомеханика», предназначены для размещения исключительно на остеоинтегрированных (заживлённых) имплантатах. После имплантации должно пройти не менее 4-6 месяцев, прежде чем реставрация может быть возобновлена. Таким образом, будет обеспечена не только первичная (механическая), а и вторичная (прочность соединения имплантата с костью) стабильность имплантата.

Медицинские изделия определённых серий можно комбинировать только с соответствующей совместимой системой имплантатов.

Для получения информации по совместимости с другими зарегистрированными медицинскими изделиями необходимо обратиться к уполномоченному представителю производителя.

Любой способ дообработки разъёмной геометрии к имплантату ведёт к образованию неточностей прилегания, которые исключают дальнейшее использование.

При использовании абатментов мультиюнит запрещается обтачивание и изменение разъёма для соединения с протетическими компонентами, так как он является необходимым для обеспечения достаточной стабильности и прилегания.

Все абатменты, винты и основания предусмотрены исключительно для одноразового использования.

Лечение с применением дентальных имплантатов имеет широкий выбор и широкие возможности как для врачей, так и для пациентов. Ортопедическое лечение с опорой на имплантаты требует от специалистов применения различных методик и способов лечения в зависимости от клинической ситуации, что предусматривает возможность использования в работе врача значительного выбора материалов, инструментов и изделий.

Последовательность этапов ортопедического лечения имеет различия в зависимости от наличия у пациента того или иного вида установленного имплантата (одноэтапная и двухэтапная имплантация), а также от ранее пройденных этапов лечения.

Система протетическая для стоматологических имплантатов представлена в виде изделий, используемых при необходимости. Изделия могут быть использованы как отдельно (для проведения конкретной процедуры в определенном этапе ортопедического лечения), так и в комплекте.

Комплект поставки определяется согласно потребностям лечебного учреждения, в зависимости от индивидуальных особенностей этапов процедуры лечения пациентов данного учреждения.

3.1 Способ применения

3.1.1 Абатмент угловой

3.1.1.1 Материал

Абатменты угловые произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

3.1.1.2 Показания к применению

- Установка протеза для одного или нескольких зубов.
- Цементная фиксация протеза.

3.1.1.3 Слепок поверхности имплантата (Врач-стоматолог)

- Снимают формирователь десны или временную конструкцию с имплантата.
- С помощью пульверизатора распыляют воздух / воду на разъем имплантата, после чего высушивают его.
- Подбирают слепочный трансфер и помещают его в одну из возможных индексаций положения имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Имея необходимый материал, снимают слепок поверхности имплантата.
- Направляют в зуботехническую лабораторию помимо слепочного трансфера и слепка имплантата информацию о челюсти-антагонисте и оттенке.

3.1.1.4 Лабораторные процедуры (Зубной техник)

- Убеждаются, что слепочный материал лишен трещин и пузырей.
- Устанавливают соответствующий лабораторный аналог имплантата на слепок имплантата и подготавливают мастер-модель жесткого гипса.
- Выбирают прямой или угловой стандартный абатмент и помещают его в лабораторный аналог имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Изготавливают временную конструкцию в соответствии с инструкцией изготовителя по эксплуатации материалов.
- Проверяют правильность посадки и состояние контактных точек конструкции.

3.1.1.5 Фиксация абатмента (Врач-стоматолог)

Примечание: Для соблюдения надлежащей прочности и соответствующих размеров, никогда не изменяйте имплантатный разъем абатмента.

- Убеждаются, что платформа имплантата лишена каких-либо остатков мягкой или костной ткани.
- Устанавливают абатмент на имплантат и закрепляют винт в имплантате с помощью подходящей отвертки.
- Снятие рентгеновского снимка зубов может быть полезным для подтверждения точной посадки абатмента.
- С помощью ключа-трещотки затягивают винт абатмента согласно рекомендованному вращающему моменту, указанному в инструкции по эксплуатации абатмента.

3.1.1.6 Цементирование окончательного протеза (Врач-стоматолог)

- Аккуратно устанавливают протез на абатмент и проверяют окклюзионный и межзубной контакт. Протез должен находиться в состоянии легкой окклюзии. Жевательная поверхность должна быть минимальной.
- Заполняют канал доступа к винту абатмента блокирующим материалом, чтобы сохранить доступ к винту абатмента.
- Цементируют протез с использованием постоянного цемента в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя цемента.

3.1.2 Абатмент временный

3.1.2.1 Материал

Абатменты временные произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

3.1.2.2 Показания к применению

- Установка протеза для одного или нескольких зубов.
- Цементная фиксация протеза.

3.1.2.3 Слепок поверхности имплантата (Врач-стоматолог)

- Снимают формирователь десны или временную конструкцию с имплантата.
- С помощью пульверизатора распыляют воздух / воду на разъем имплантата, после чего высушивают его.
- Подбирают слепочный трансфер и помещают его в одну из возможных индексаций положения имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Имея необходимый материал, снимают слепок поверхности имплантата.
- Направляют в зуботехническую лабораторию помимо слепочного трансфера и слепка имплантата информацию о челюсти-антагонисте и оттенке.

3.1.2.4 Лабораторные процедуры (Зубной техник)

- Убеждаются, что слепочный материал лишен трещин и пузырей.
- Устанавливают соответствующий лабораторный аналог имплантата на слепок имплантата и подготавливают мастер-модель жесткого гипса.
- Выбирают абатмент обрабатываемый и модифицируют в соответствии с потребностями пациента. Для модификации помещают абатмент в защитный аналог и подготавливают его с помощью карборундового диска и твердосплавного бора.

Примечание: Для соблюдения надлежащей прочности и соответствующих размеров, никогда не изменяйте имплантатный разъем абатмента и не уменьшайте толщину стенки менее 0,4 мм.

- Располагают абатмент на лабораторном аналоге, проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную
- Изготавливают временную конструкцию в соответствии с инструкцией изготовителя по эксплуатации материалов

3.1.2.5 Фиксация абатмента (Врач-стоматолог)

- Убеждаются, что платформа имплантата лишена каких-либо остатков мягкой или костной ткани.
- Устанавливают абатмент на имплантат, вкручивая его или закрепляя винт в имплантате с помощью подходящей отвертки.
- Снятие рентгеновского снимка зубов может быть полезным для подтверждения точной посадки абатмента.
- С помощью ключа-трещотки затягивают винт абатмента (при использовании «абатмента модифицируемого прямого» - используют оригинальный инструмент фирмы Straumann для фиксации абатмента) согласно рекомендованному вращающему моменту, указанному в инструкции по эксплуатации абатмента.

3.1.2.6 Цементирование окончательного протеза (Врач-стоматолог)

- Аккуратно устанавливают протез на абатмент и проверяют окклюзионный и межзубной контакт. Протез должен находиться в состоянии легкой окклюзии. Жевательная поверхность должна быть минимальной.
- Заполняют канал доступа к винту абатмента блокирующим материалом, чтобы сохранить доступ к винту абатмента (не относится к «абатменту модифицируемому прямому»).
- Цементируют протез с использованием постоянного цемента в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя цемента.

3.1.3 Абатмент мультиюнит (угловой/временный)

3.1.3.1 Материал

Абатменты мультиюнит произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

3.1.3.2 Показания к применению

- Установка многокомпонентного винтового протеза.
- Используют в случае повышенной посадочной платформы зубного протеза, когда установка протеза на уровне имплантата не представляется возможной, или является единственным возможным способом в связи с глубиной или углом наклона имплантата.

3.1.3.3 Соединение абатмента (Врач-стоматолог)

- Снимают формователь десны или временную конструкцию с имплантата и убеждаются, что платформа имплантата лишена каких-либо остатков мягкой или костной ткани.
- Выбирают подходящую высоту абатмента мультиюнит: измеряют высоту воротника абатмента.
- Вкручивают абатмент мультиюнит в имплантат, после чего с помощью ключа-трещотки и отвертки мультиюнит затягивают винт абатмента согласно рекомендованному вращающему моменту, указанному в инструкции по эксплуатации абатмента.

- Снятие рентгеновского снимка зубов может быть полезным для подтверждения точной посадки абатмента.

3.1.3.4 Слепок поверхности имплантата (Врач-стоматолог)

- Устанавливают соответствующий слепочный трансфер на абатмент мультиюнит и затягивают винт вручную.
- С помощью пульверизатора распыляют воздух / воду на разъем мультиюнит, после чего высушивают его.
- Имея необходимый материал, снимают слепок поверхности абатмента мультиюнит.
- Направляют в зуботехническую лабораторию помимо слепочного трансфера и слепка имплантата информацию о челюсти-антагонисте и оттенке.
- Используя винт-заглушку мультиюнит в верхней части абатмента мультиюнит, закрывают канал доступа к винту абатмента мультиюнит.

3.1.3.5 Лабораторные процедуры (Зубной техник)

- Убеждаются, что слепочный материал лишен трещин и пузырей.
- Устанавливают соответствующий лабораторный аналог имплантата на слепочный трансфер и подготавливают мастер-модель жесткого гипса.
- Производят протезирование, используя компоненты протетические:
- Для временного протезирования используют колпачок титановый мультиюнит (см. процедуру установки абатмента временного);
- Для пассивного и постоянного соединения протезов используют колпачок титановый вклеиваемый мультиюнит либо основание титановое мультиюнит.
- Проверяют правильность посадки и состояние контактных точек конструкции.

3.1.3.6 Соединение окончательного протеза (Врач-стоматолог)

Примечание: Для соблюдения надлежащей прочности и соответствующих размеров, никогда не изменяйте имплантатный разъем абатмента.

- Удаляют винт-заглушку мультиюнит.
- Проверяют фиксацию абатмента мультиюнит

Аккуратно устанавливают протез на абатменты и соединяют его с абатментами с помощью винтов абатмента мультиюнит. Начинают со среднего заднего сегмента и затягивают все остальные винты попеременно с левой и правой стороны.

- Проверяют окклюзионный и межзубной контакты. Протез должен находиться в состоянии легкой окклюзии. Жевательная поверхность должна быть минимальной.
- С помощью ключа-трещотки затягивают винты до 15 Нсм.
- Заполняют герметично канал доступа к винту абатмента мультиюнит с использованием соответствующего материала, такого как гуттаперча или силикон, после чего закрывают канал светоотверждаемым материалом.

3.1.4 Абатмент комбинированный / двойной

3.1.4.1 Материал

Абатменты комбинированный произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

3.1.4.2 Показания к применению

- Съёмные, состоящие из нескольких частей, зубные протезы с опорой на имплантаты.

3.1.4.3 Слпок поверхности имплантата (Врач-стоматолог)

- Снимают формователь десны или временную конструкцию с имплантата.
- С помощью пульверизатора распыляют воздух / воду на разъем имплантата, после чего высушивают его.
- Подбирают слепочный трансфер и помещают его в одну из возможных индексаций положения имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Имея необходимый материал, снимают слпок поверхности имплантата.
- Направляют в зуботехническую лабораторию помимо слепочного трансфера и слпка имплантата информацию о челюсти-антагонисте и оттенке.

3.1.4.4 Лабораторные процедуры (Зубной техник)

- Убеждаются, что слпочный материал лишен трещин и пузырей.
- Устанавливают соответствующий лабораторный аналог имплантата на слпочный трансфер и подготавливают мастер-модель жесткого гипса.

Выбирают прямой абатмент помещают его в лабораторный аналог имплантата.

- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Изготавливают временную конструкцию в соответствии с инструкцией изготовителя по эксплуатации материалов.
- Проверяют правильность посадки и состояние контактных точек конструкции.

3.1.4.5 Фиксация абатмента (Врач-стоматолог)

Примечание: Для соблюдения надлежащей прочности и соответствующих размеров, никогда не изменяйте имплантатный разъем абатмента.

- Убеждаются, что платформа имплантата лишена каких-либо остатков мягкой или костной ткани.
- Устанавливают абатмент на имплантат и закрепляют его напрямую (прямой абатмент) с помощью ключа-трещотки и соответствующей отвертки согласно рекомендованному вращающему моменту, указанному в инструкции по эксплуатации абатмента.
- Снятие рентгеновского снимка зубов может быть полезным для подтверждения точной посадки абатмента.
- Заполняют разъем для инструмента (прямой абатмент) блокирующим материалом, чтобы сохранить доступ к нему доступ.

3.1.4.6 Соединение окончательного протеза (Врач-стоматолог)

- Аккуратно устанавливают протез на абатменты и проверяют окклюзионный контакт и контакт между мягкими тканями. Протез должен находиться в состоянии легкой окклюзии. Жевательная поверхность должна быть минимальной.

3.1.5 Абатмент шариковый

3.1.5.1 Материал

Абатменты шариковые произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

3.1.5.2 Показания к применению

- Съемные, состоящие из нескольких частей, зубные протезы с опорой на имплантаты.

3.1.5.3 Слепок поверхности имплантата (Врач-стоматолог)

- Снимают формирова́тель десны или временную конструкцию с имплантата.
- С помощью пульверизатора распыляют воздух / воду на разъем имплантата, после чего высушивают его.
- Подбирают слепочный трансфер и помещают его в одну из возможных индексаций положения имплантата.

Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.

- Имея необходимый материал, снимают слепок поверхности имплантата.
- Направляют в зуботехническую лабораторию помимо слепочного трансфера и слепка имплантата информацию о челюсти-антагонисте и оттенке.

3.1.5.4 Лабораторные процедуры (Зубной техник)

- Убеждаются, что слепочный материал лишен трещин и пузырей.
- Устанавливают соответствующий лабораторный аналог имплантата на слепочный трансфер и подготавливают мастер-модель жесткого гипса.
- Выбирают подходящий абатмент и помещают его в лабораторный аналог имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Изготавливают гибри́д-абатмент в соответствии с инструкцией изготовителя по эксплуатации материалов согласно технологии напрессовывания керамики.
- Проверяют правильность бесшовной посадки керамики на абатмент.

3.1.5.5 Фиксация гибри́д-абатмента / абатмента с напрессованной керамической коронкой (Врач-стоматолог)

Примечание: Для соблюдения надлежащей прочности и соответствующих размеров, никогда не изменяйте имплантатный разъем абатмента.

- Убеждаются, что платформа имплантата лишена каких-либо остатков мягкой или костной ткани.
- Устанавливают гибри́д-абатмент или абатмент с напрессованной керамической коронкой на имплантат и закрепляют винт абатмента с помощью подходящей отвертки.
- Снятие рентгеновского снимка зубов может быть полезным для подтверждения точной посадки абатмента.
- С помощью ключа-трещотки затягивают винт абатмента согласно рекомендованному вращающему моменту, указанному в инструкции по эксплуатации абатмента.
- Заполняют герметично канал доступа к винту абатмента с напрессованной керамической коронкой с использованием соответствующего материала, такого как гуттаперча или силикон, после чего закрывают канал светоотверждаемым материалом, чтобы сохранить доступ к винту абатмента.

3.1.5.6 Цементирование окончательного протеза (Врач-стоматолог)

- Аккуратно устанавливают керамическую коронку на гибри́д-абатмент и проверяют окклюзионный и межзубной контакт. Протез должен находиться в состоянии легкой окклюзии. Жевательная поверхность должна быть минимальной.

- Заполняют герметично канал доступа к винту абатмента с использованием соответствующего материала, такого как гуттаперча или силикон, после чего закрывают канал светоотверждаемым материалом, чтобы сохранить доступ к винту абатмента.
- Цементируют протез с использованием постоянного цемента в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя цемента.

3.1.6 Заготовки премилл абатментов

3.1.6.1 Материал

Заготовки премилл абатмента произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

3.1.6.2 Показания к применению

- Установка протеза для одного или нескольких зубов.

3.1.6.3 Сканирование челюстей пациента (Врач-стоматолог)

- Снимают формирователь десны или временную конструкцию с имплантата.
- С помощью пульверизатора распыляют воздух / воду на разъем имплантата, после чего высушивают его.
- Подбирают абатмент для сканирования, помещают в одну из возможных индексаций положения имплантата и фиксируют его винтом для фиксации к имплантату.
- Сканирование остеоинтегрированного имплантата с и без абатмента для сканирования, соседних и противоположных, а также и окклюзии челюстей.
- Для определения данных, необходимых для приготовления на 3D-принтере напечатанной мастер-модели, сканируют всю полость рта с и без абатмента для сканирования.
- На основании полученных данных виртуально конструируется индивидуальный абатмент при помощи соответствующего программного обеспечения, а также данных из библиотеки.
- Сохраняют полученные данные для передачи их компании.
- В случае, если у врача-стоматолога нет соответствующего оборудования для сканирования, необходимо перейти к традиционному и общепринятому методу снятия слепка поверхности имплантата (см. 3.1.9.4).

3.1.6.4 Слепок поверхности имплантата (Врач-стоматолог)

- Снимают формирователь десны или временную конструкцию с имплантата.

С помощью пульверизатора распыляют воздух / воду на разъем имплантата, после чего высушивают его.

Подбирают слепочный трансфер и помещают его в одну из возможных индексаций положения имплантата.

- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Имея необходимый материал, снимают слепок поверхности имплантата.
- Направляют в зуботехническую лабораторию помимо слепочного трансфера и слепка имплантата информацию о челюсти-антагонисте и оттенке.

3.1.6.5 Лабораторные процедуры (Зубной техник)

- Убеждаются, что слепочный материал лишен трещин и пузырей.

- Устанавливают соответствующий лабораторный аналог имплантата на слепок имплантата и готовят мастер-модель жесткого гипса с помощью десневой маски, которая может быть сканирована и удалена.
- Вставляют абатмент для сканирования в лабораторный аналог имплантата и вкручивают его внутрь с помощью соответствующего лабораторного винта.
- Выбирают подходящий имплантат и заготовка примилл абатмента из библиотеки.
- Сканируют десневую маску.
- Изготавливают по заказу профиль выступления и часть примилл абатмента, обращенную к ротовой полости, в соответствии с конкретными анатомическими характеристиками.
- Убедитесь, что минимальная толщина стенки примилл абатмента PreFace составляет не менее 0,5 мм, а угол наклона не превышает 30°.

3.1.6.6 Обработка на фрезерном станке (Зуботехническая лаборатория)

- Загружают переданный файл данных и проверяют рекомендации конструкции относительно толщины стенок и угла наклона.
- Выбирают надлежащий примилл абатмент и устанавливают его в держатель абатмента.
- Обработывают на фрезерном станке примилл абатмент в соответствии с переданным файлом данных.

Примечание: Для соблюдения надлежащей прочности и соответствующих размеров, никогда не изменяйте имплантатный разъем примилл абатмента.

- Дообработывают и проверяют изготовленный индивидуальный абатмент.

3.1.6.7 Фиксация абатмента (Врач-стоматолог)

Убеждаются, что платформа имплантата лишена каких-либо остатков мягкой или костной ткани.

Устанавливают абатмент на имплантат и закрепляют винт абатмента с помощью подходящей отвертки.

- Снятие рентгеновского снимка зубов может быть полезным для подтверждения точной посадки абатмента.
- С помощью ключа-трещотки затягивают винт абатмента согласно рекомендованному вращающему моменту, указанному в инструкции по эксплуатации абатмента.

3.1.6.8 Цементирование окончательного протеза (Врач-стоматолог)

- Аккуратно устанавливают протез на абатмент и проверяют окклюзионный и межзубной контакт. Протез должен находиться в состоянии легкой окклюзии. Жевательная поверхность должна быть минимальной.
- Заполняют канал доступа к винту блокирующим материалом, чтобы сохранить доступ к винту абатмента.
- Цементируют протез с использованием постоянного цемента в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя цемента.

3.1.7 Винт фиксирующий

3.1.7.1 Материал

Винты абатментов произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

3.1.7.2 Назначение

- Фиксация абатментов всех видов к имплантату.

3.1.8 Винт трансфера слепочного

3.1.8.1 Материал

Винты слепочных трансферов произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

3.1.8.2 Назначение

- Фиксация слепочных трансферов и оснований к имплантату.

3.1.9 Винт имплантовода.

3.1.9.1 Материал

Винты имплантовода произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

3.1.9.2 Назначение

- Фиксация многокомпонентной конструкции на протяжении планирования, моделирования, производства.

3.1.10 Винт фиксирующий мультиюнит

3.1.10.1 Материал

Винты мультиюнита произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

3.1.10.2 Назначение

- Фиксация многокомпонентной конструкции на протяжении планирования, моделирования, производства, а также финальная фиксация многокомпонентной конструкции к абатменту мультиюнита.

3.1.11 Тело имплантовода

3.1.11.1 Материал

Тело имплантовода произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

3.1.11.2 Назначение

- Многокомпонентная конструкция для хранения имплантата.

3.1.12 Имплантовод в сборе

3.1.12.1 Материал

Имплантоводы произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

3.1.12.2 Назначение

- Имплантовод в сборе сочетает в себе винт и тело имплантовода
- Многокомпонентная конструкция для хранения имплантата.

3.1.13 Основание титановое

3.1.13.1 Материал

Основания титановые произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

3.1.13.2 Показания к применению

- Изготовление гибрид-абатмента
- Установка протеза для одного зуба.
- Цементная фиксация протеза.

3.1.13.3 Слепок поверхности имплантата (Врач-стоматолог)

- Снимают формирова́тель десны или временную конструкцию с имплантата.
- С помощью пульверизатора распыляют воздух / воду на разъем имплантата, после чего высушивают его.
- Подбирают слепочный трансфер и помещают его в одну из возможных индексаций положения имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Имея необходимый материал, снимают слепок поверхности имплантата.
- Направляют в зуботехническую лабораторию помимо слепочного трансфера и слепка имплантата информацию о челюсти-антагонисте и оттенке.

3.1.13.4 Лабораторные процедуры (Зубной техник)

- Убеждаются, что слепочный материал лишен трещин и пузырей.
- Устанавливают соответствующий лабораторный аналог имплантата на слепок имплантата и подготавливают мастер-модель жесткого гипса с помощью десневой маски, которая может быть сканирована и удалена.
- Вставляют абатмент для сканирования в лабораторный аналог имплантата и вкручивают его внутрь с помощью соответствующего лабораторного винта.
- Выбирают подходящий имплантат и основание титановое из библиотеки и сканируют модель с помощью вставленного абатмента для сканирования.
- Сканируют десневую маску.
- Изготавливают по заказу профиль выступления и часть абатмента, обращенную к ротовой полости, в соответствии с конкретными анатомическими характеристиками пациента.
- Убедитесь, что минимальная толщина стенки циркониевого абатмента составляет не менее 0,4 мм, а угол наклона не превышает 30°.
- Сохраняют данные для передачи их на зуботехнический фрезерный станок.
- Загружают переданный файл данных и проверяют толщину стенок и угол наклона.
- Выбирают материал (цирконий, кобальт-хромовый сплав и т. д.) и обрабатывают на фрезерном станке в соответствии с переданным файлом данных.

3.1.13.5 Склеивание основания титанового (Зубной техник)

- Вставляют основание титановое в лабораторный аналог имплантата и заполняют винтовой канал воском.
- Проводят пескоструйную обработку оксидом алюминия (110 мкм, 2 бар) соединяемых поверхностей основания титанового и циркониевого абатмента или мостовидного протеза, после чего очищают поверхности.

- Наносят адгезивный клей на склеиваемую поверхность основания титанового в соответствии с рекомендациями производителя.
- Помещают циркониевый абатмент или мостовидный протез на основание титановое и обеспечивают корректное соединение.
- Удаляют излишки адгезивного клея и воска.

3.1.13.6 Фиксация абатмента (Врач-стоматолог)

Примечание: Для соблюдения надлежащей прочности и соответствующих размеров, никогда не изменяйте имплантатный разъем основания титанового.

- Убеждаются, что разъем имплантата лишён каких-либо остатков мягкой или костной ткани.
- Устанавливают абатмент или многокомпонентную конструкцию на имплантат и закрепляют винт в имплантате с помощью подходящей отвертки.
- Снятие рентгеновского снимка зубов может быть полезным для подтверждения точной посадки абатмента.
- С помощью ключа-трещотки затягивают винт абатмента согласно рекомендованному вращающему моменту, указанному в инструкции по эксплуатации абатмента.

3.1.13.7 Цементирование окончательного протеза (Врач-стоматолог)

- Аккуратно устанавливают протез на абатмент и проверяют окклюзионный и межзубной контакт. Протез должен находиться в состоянии легкой окклюзии. Жевательная поверхность должна быть минимальной.
- Заполняют канал доступа к винту блокирующим материалом, чтобы сохранить доступ к винту абатмента.
- Цементируют протез с использованием постоянного цемента в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя цемента.

3.1.14 Скан-маркер

3.1.14.1 Материал

Скан-маркеры произведены из нелегированного титана класса 5 (titanium grade 5).

3.1.14.2 Назначение

- Для сканирования ротовой полости в клинических условиях и модели в лабораторных условиях с целью определения точного месторасположения абатмента и остеоинтегрированного имплантата, а также направления.

3.1.15 Трансфер слепочный

3.1.15.1 Материал

Трансферы слепочные произведены из титана класса 5.

3.1.15.2 Назначение

- Для снятия слепка с целью определения точного месторасположения имплантата в челюстной кости (/для индивидуального/ а также прилегающей к имплантату сформированной десны) методом закрытой (/для индивидуального/ при помощи колпачка трансфера слепочного индивидуального) /открытой ложки в клинических условиях, фиксируя трансферы на

остеоинтегрированные имплантаты. Трансферы предназначены для точного месторасположения соответствующих абатментов и, соответственно, размещаются и фиксируются для снятия слепка на них, а не на остеоинтегрированных имплантатах.

3.1.16 Аналог имплантата лабораторный / Аналог для абатмента шарикового

3.1.16.1 *Материал*

Аналоги лабораторные произведены из титана класса 5 и анодированы (titanium grade 5)

3.1.16.2 *Назначение*

- Для планирования и изготовления съёмной многокомпонентной конструкции на гипсовой или на напечатанной на 3D-принтере модели в лабораторных условиях.
- Имитирует соответствующий абатмент или имплантат соответствующей серии.

3.1.17 Формирователь десны

3.1.17.1 *Материал*

Формирователи десны произведены из титана класса 5 (titanium grade 5)

3.1.16.2 *Назначение*

- Временно заменяет собой абатмент, который связывает корень и коронку. И одновременно подготавливает пространство для завершения имплантации.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры и масса изделий указаны в приложении А.

Минимальный крутящий момент на разрыв винтов не менее 0,35 Н×м.

Минимальный угол поворота при повреждении винтов должен быть более 150°.

Параметр шероховатости наружных поверхностей Ra:

- не более 0,4 мкм (кроме резьбы) по ГОСТ 2789, поверхностей резьбы;
- не более 0,64 мкм, остальных поверхностей.

Твердость изделий после термической обработки HRC: 45-47 ед.

5. МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Материал
Формирователь десны	Титан класс 5 (Al 5.5-6.75%, V 3.5-4.5%, Fe 0.35% max, O ₂ 0.2% max, C 0,08% max, N ₂ 0.05% max, H ₂ 0.015% max), марка «Пруток шлифованный титанового сплава TiAL4V по ГОСТ Р ИСО 5832-3-220», производства ООО «Мегаметалл-трейд», Россия
Абатмент двойной	
Абатмент временный	
Абатмент угловой	
Абатмент мультиюнит (угловой / временный)	
Абатмент комбинированный	
Абатмент шариковый	
Основание титановое	
Заготовка премилл абатмента индивидуального	
Винт фиксирующий	
Винт фиксирующий мультиюнит	
Винт имплантовода	

Тело имплантовода	
Имплантовод в сборе	
Винт трансфера слепочного	
Аналог имплантата лабораторный	
Аналог для абатмента шарикового	
Трансфер слепочный	
Скан-маркер	

Вид контакта с организмом человека:

Основание титановое – Постоянный (более 30 сут.) контакт со слизистой ротовой полости;

Абатмент временный, Формирователь десны – Длительный (от 24 ч до 30 сут.) контакт со слизистой ротовой полости.

Трансфер слепочный – Кратковременный (менее 24 ч) контакт со слизистой ротовой полости.

6. МАРКИРОВКА.

Вся продукция компании Биомеханика маркируется в соответствии с описанием маркировки ниже.

На индивидуальной упаковке изделия указывается на русском языке следующая информация:

- наименование изделия;
- наименование варианта исполнения изделия;
- наименование составляющего варианта исполнения;
- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- наименование и адрес уполномоченного представителя производителя;
- обозначение настоящих технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- символ «Изготовитель» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Дата изготовления» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Код партии» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Номер по каталогу» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Использовать до» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Предел температуры» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Диапазон влажности» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Нестерильно» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Запрет на повторное применение» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Осторожно!» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- надпись «Осторожно!» по ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Пример маркировки индивидуальной упаковки:

Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, вариант исполнения:



Система протетическая для стоматологических имплантатов по ТУ 32.50.11-001-21602660-2021, в составе:

Формирователь десны, в необходимом типоразмере _____ шт.



Общество с ограниченной ответственностью «Биомеханика» (ООО «Биомеханика»)

Юридический адрес: Россия, 454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул.

Братьев Кашириных, д. 34, пом. 1. Тел.: +7 (351) 751-30-09, www.bmcnc.ru

Место производства: Россия, 454112, Челябинская область, г. Челябинск, Комсомольский проспект, д. 29

Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «НС Технология» (ООО «НС Технология»)

Россия, 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 26Б, пом. 12, офис 101. Тел.: +7 (351) 701-01-00, +7 (351) 750-58-75, www.nct.dental

№ _____ от _____



2021.05



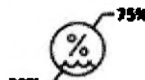
T1193



BNA400020



2031.05



Осторожно!



На транспортной потребительской упаковке изделия указывается на русском языке следующая информация:

- наименование изделия;
- наименование варианта исполнения изделия;
- наименование составляющего варианта исполнения;
- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- наименование и адрес уполномоченного представителя производителя;
- обозначение настоящих технических условий;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- символ «Изготовитель» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Дата изготовления» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Код партии» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Номер по каталогу» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Использовать до» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Предел температуры» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Диапазон влажности» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Нестерильно» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- символ «Запрет на повторное применение» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;

- символ «Осторожно!» по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- надпись «Осторожно!» по ГОСТ Р ИСО 15223-1.

7. УПАКОВКА.

Изделие помещается в индивидуальную упаковку, соответствующую следующим характеристикам:

Материал	Пленка полиэтилентерефталатная / БОПП-пленка (PET / bopp)	Полиэтилен (PE)
Плотность	75 мкм	80 мкм
Цвет	Белый	Прозрачный
Клей	Без клея	Без клея
Вес	0,0032 кг	0,005 кг
Размер	80×130 мм	120×170 мм
Объем	0,0000071 м ³	0,00001 м ³
Производитель	Dongguan Hongty Packaging Material Co., Ltd, Китай	Индивидуальный предприниматель Юрин Иван Владимирович, Россия

Для транспортирования изделия в индивидуальной упаковке должны быть уложены в картонную упаковку. Коробка должна выкладываться поролоновыми вкладышами сверху и снизу, а также свободное пространство между продуктами должно заполняться упаковочными чипсами. В заключение всё должно накрываться воздушно-пузырчатой упаковочной плёнкой, упаковка закрывается и заклеивается упаковочным скотчем.

Масса брутто должна быть не более 10 кг.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

Изделия хранятся на складе готовой продукции в первичной упаковке. Для осуществления пересылки они забираются оттуда и складываются транспортные короба. Размер коробки со съёмной крышкой выбирается в соответствии с количеством отсылающихся продуктов. Коробка выкладывается поролоновыми вкладышами сверху и снизу, а также свободное пространство между продуктами заполняется упаковочными чипсами. В заключение всё накрывается воздушно-пузырчатой упаковочной плёнкой, упаковка закрывается и заклеивается упаковочным скотчем. Коробки транспортируют автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом.

Упакованное медицинское изделие (абатмент, винт, колпачок, основание и принадлежности) может быть размещено на складе при температуре от +5 до +40°C, относительной влажности не более 89% (при t = +25°C) в течение неограниченного времени, так как оно является устойчивым к ожидаемым температурам и влажности воздуха.

Срок годности – 10 лет.

9. СТЕРИЛЬНОСТЬ.

Все медицинские изделия, указанные в п. 1.1., являются стерилизуемыми и поставляются нестерильными.

Изделия должны быть стерилизованы перед применением влажным теплом при температуре 135°C в течение 5 минут. В качестве индивидуальной упаковки для стерилизации изделий должна быть использована полиэтиленовая пленка марки «Пищевая» по ГОСТ 10354 либо бумажно-пленочный рукав плоский (типа Клинипак, ПИК-ПАК, Steripack, Wipak, BOM и т.п.).

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ.

По окончании срока службы изделия должны быть утилизированы в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. По классу опасности отходов в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания изделия относятся к классу Б. Специальных требований к утилизации изделия не имеют.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Изделия при использовании, транспортировке и хранении не оказывают негативного воздействия на человека и окружающую среду.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Производитель предоставляет гарантию на имплантаты сторонних производителей, которые будут использоваться в сочетании с медицинским изделием в следующем виде:

Производитель гарантирует возмещение подтвержденных материальных затрат на замену имплантата, если имплантат стороннего производителя был использован в комбинации с нашим изделием после окончания периода остеоинтеграции, в случае, если производитель имплантата отказывается в выполнении гарантийных обязательств, объясняя это тем, что имплантат был объединен с изделием производства нашей компании.

Производитель предоставляет сроки гарантийного обслуживания для сторонних имплантатов равные тем, которые были указаны их изготовителем. Выполнение гарантийных обязательств не связано с новой гарантией или продлением срока старой.

Гарантия не распространяется на:

- Одномоментное протезирование,
- Повреждение нашей продукции или имплантатов в результате внешних воздействий, таких как аварии или сопоставимые инциденты, а также случаев медицинской халатности,
- Несостоятельность сторонних имплантатов, например, производственный брак или дефекты материала,
- Несостоятельность наших изделий или имплантатов в случае наличия у пациента противопоказаний к вмешательству, таких как алкоголизм, сахарный диабет или наркомания,
- Дальнейшие претензии и косвенные убытки, такие как затраты на работу лабораторного техника или финансовые потери, обусловленные лечением в соматических стационарах и/или стоматологическими процедурами.

Данные добровольные гарантийные обязательства предоставляются в дополнение к гарантийным правам, определенных законом, и ответственности производителя перед потребителем за качество продукции и не влияет на них. Кроме того, потребитель в праве рассчитывать на принятые в нашей компании Общие положения и условия продажи. Уступка прав настоящей гарантии требует нашего согласия.

Жалобы на условия представленного гарантийного обязательства, пожалуйста, присылайте с полным пакетом сопроводительных документов по адресу, указанному в пункте 1.2 данной инструкции.

Условия гарантии

Компания «Биомеханика» имеет право изменить или прекратить программу гарантийного обслуживания в любое время. Внесение изменений или прекращение действия гарантийных обязательств не влияет на изделия, на которые распространяются условия настоящей гарантии, и принятые до даты внесения изменений или прекращения срока действия программы гарантийного обслуживания. Компания «Биомеханика» гарантирует качество своей продукции,

а также замену изделий собственного производства без дополнительных затрат со стороны потребителя, если товар имеет производственный брак или дефекты материала, или не соответствует установленным стандартам качества.

Гарантийный срок продукции «Биомеханика» не ограничен и является пожизненным.

Гарантийный срок «Биомеханика» абатментов составляет 3 (три) года. Поскольку все матрицы и их вставки подвержены естественному износу, они исключены из гарантии.

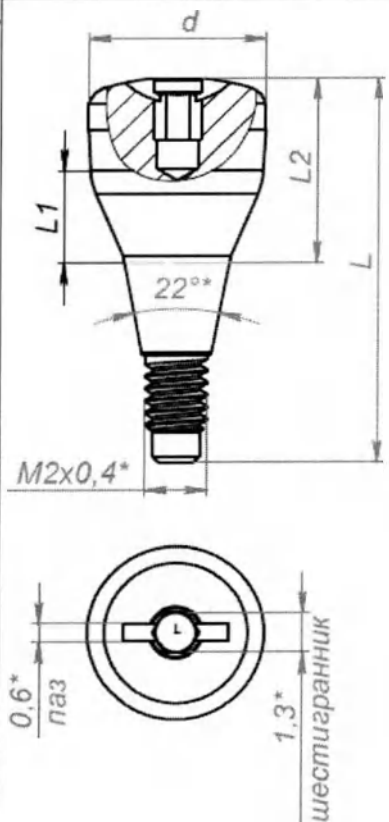
13. ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ.

Обозначение	Наименование
ГОСТ ISO 14971-2011	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ Р ИСО 17665-1-2016	Стерилизация медицинской продукции. Влажное тепло. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий.
ГОСТ Р ИСО 14801-2012	Стоматология. Имплантаты. Усталостные испытания для внутрикостных стоматологических имплантатов
ГОСТ 166-89	Штангенциркули. Технические условия.
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.
ГОСТ 25706-83	Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования.
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия.
ГОСТ 2789-73	Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.
ГОСТ 19300-86	Средства измерений шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры.
ГОСТ 9378-93	Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия.
ГОСТ 9500-84	Динамометры образцовые переносные. Общие технические требования.
ГОСТ 20790-93	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования.
ГОСТ 23677-79	Твердомеры для металлов. Общие технические требования.
ГОСТ 32096-2013	Картон тароупаковочный для пищевой продукции. Общие технические условия.
МУ 25.1-001-86	Устойчивость изделий медицинской техники к воздействию агрессивных биологических жидкостей. Методы испытаний.
СанПиН 2.1.3684-21	«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г.	«Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий».
---------------------------------------	---

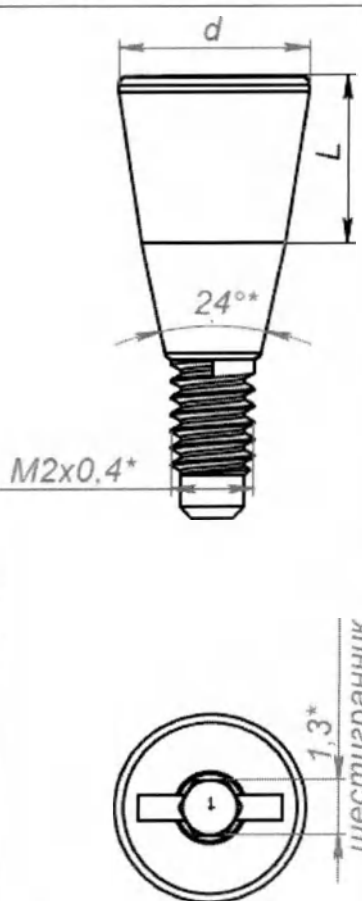
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Техническое описание медицинского изделия

Формирователь десны

Наименование	Внешний вид	Номенклатура	d, мм	L1, мм	L2, мм	L, мм	Вес, г
Формирователь десны		ВНА400020	4.0	0	2.0	6,3	0,098
		ВНА402020	4.0	2.0	2.0	8,2	0,19
		ВНА402035	4.0	2.0	3.5	10,85	0,22
		ВНА403050	4.0	3.0	5.0	12,5	0,294
		ВНА404070	4.0	4.0	7.0	14,35	0,376
		ВНА452020	4.5	2.0	2.0	8,2	0,204
		ВНА452035	4.5	2.0	3.5	10,8	0,228
		ВНА453050	4.5	3.0	5.0	12,55	0,302
		ВНА454070	4.5	4.0	7.0	14,3	0,384
		ВНА552020	5.5	2.0	2.0	8,25	0,22
		ВНА552035	5.5	2.0	3.5	10,85	0,244
		ВНА553050	5.5	3.0	5.0	12,55	0,318
		ВНА554070	5.5	4.0	7.0	14,45	0,4
		ВНА652020	6.5	2.0	2.0	8,2	0,236
		ВНА652035	6.5	2.0	3.5	10,85	0,26
		ВНА653050	6.5	3.0	5.0	12,5	0,334
		ВНА654070	6.5	4.0	7.0	14,5	0,416
		ВНА753050	7.5	3.0	5.0	12,6	0,35
		ВНА853050	8.5	3.0	5.0	12,6	0,366
		ВНА953050	9.5	3.0	5.0	12,6	0,382
Формирователь десны, совместим с НСТ	На рисунке все размеры (кроме угловых) указаны в мм. * - размеры одинаковы для всех артикулов.	НА4010i	4.0	1.0	2.0	6,3	0,098
		НА4015i	4.0	1.5	2.0	8,2	0,19
		НА4020i	4.0	2.0	3.5	10,85	0,22
		НА4025i	4.0	2.5	4.0	12,5	0,294
		НА4030i	4.0	3.0	4.5	12,55	0,376
		НА4035i	4.0	3.5	5,0	14,45	0,382
		НА4040i	4.0	4.0	5.5	14,85	0,416
		НА4045i	4.0	4.5	6.0	15,0	0,436
		НА4050i	4.0	5.0	6.5	15,3	0,452
		НА4055i	4.0	5.5	7.0	15,85	0,476
		НА4060i	4.0	6.0	7.5	16,0	0,487
		НА4065i	4.0	6.5	8.0	16,35	0,496
		НА4070i	4.0	7.0	8.5	16,85	0,502
		НА4075i	4.0	7.5	9.0	17,1	0,526
		НА4080i	4.0	8.0	9.5	17,56	0,578
		НА4510i	4.5	1.0	2.0	6,3	0,098
		НА4515i	4.5	1.5	2.0	8,2	0,19
		НА4520i	4.5	2.0	3.5	10,85	0,22
		НА4525i	4.5	2.5	4.0	12,5	0,294
		НА4530i	4.5	3.0	4.5	12,55	0,376
		НА4535i	4.5	3.5	5,0	14,45	0,382
		НА4540i	4.5	4.0	5.5	14,85	0,416
		НА4545i	4.5	4.5	6.0	15,0	0,436
		НА4550i	4.5	5.0	6.5	15,3	0,452
		НА4555i	4.5	5.5	7.0	15,85	0,476
		НА4560i	4.5	6.0	7.5	16,0	0,487
		НА4565i	4.5	6.5	8.0	16,35	0,496
		НА4570i	4.5	7.0	8.5	16,85	0,502
		НА4575i	4.5	7.5	9.0	17,1	0,526

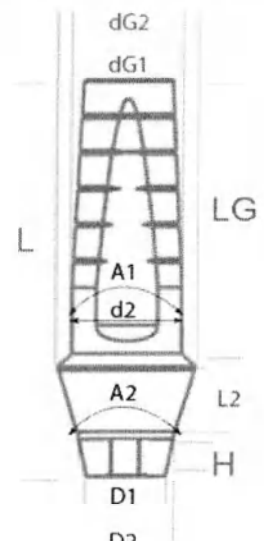
		HA4580i	4.5	8.0	9.5	17,56	0,578
		HA5010i	5.0	1.0	2.0	6,3	0,098
		HA5015i	5.0	1.5	2.0	8,2	0,19
		HA5020i	5.0	2.0	3.5	10,85	0,22
		HA5025i	5.0	2.5	4.0	12,5	0,294
		HA5030i	5.0	3.0	4.5	12,55	0,376
		HA5035i	5.0	3.5	5.0	14,45	0,382
		HA5040i	5.0	4.0	5.5	14,85	0,416
		HA5045i	5.0	4.5	6.0	15,0	0,436
		HA5050i	5.0	5.0	6.5	15,3	0,452
		HA5055i	5.0	5.5	7.0	15,85	0,476
		HA5060i	5.0	6.0	7.5	16,0	0,487
		HA5065i	5.0	6.5	8.0	16,35	0,496
		HA5070i	5.0	7.0	8.5	16,85	0,502
		HA5075i	5.0	7.5	9.0	17,1	0,526
		HA5080i	5.0	8.0	9.5	17,56	0,578
		HA5510i	5.5	1.0	2.0	6,3	0,098
		HA5515i	5.5	1.5	2.0	8,2	0,19
		HA5520i	5.5	2.0	3.5	10,85	0,22
		HA5525i	5.5	2.5	4.0	12,5	0,294
		HA5530i	5.5	3.0	4.5	12,55	0,376
		HA5535i	5.5	3.5	5,0	14,45	0,382
		HA5540i	5.5	4.0	5.5	14,85	0,416
		HA5545i	5.5	4.5	6.0	15,0	0,436
		HA5550i	5.5	5.0	6.5	15,3	0,452
		HA5555i	5.5	5.5	7.0	15,85	0,476
		HA5560i	5.5	6.0	7.5	16,0	0,487
		HA5565i	5.5	6.5	8.0	16,35	0,496
		HA5570i	5.5	7.0	8.5	16,85	0,502
		HA5575i	5.5	7.5	9.0	17,1	0,526
		HA5580i	5.5	8.0	9.5	17,56	0,578

Наименование	Внешний вид	Номенклатура	d, мм	L, мм	Общая длина, мм	Вес, г
Формирователь десны, совместим с ANK	На рисунке все размеры (кроме угловых) указаны в мм. * - размеры одинаковы для всех артикулов.	HA15Sa	5,5	1,5	6,9	0,31
		HA30Sa	5,5	3,0	8,4	0,36
		HA15La	7	1,5	6,9	0,57
		HA30La	7	3,0	8,4	0,62

Наименование	Внешний вид	Номенклатура	d, мм	L, мм	Общая длина, мм	Вес, г
Формирователь десны, совместим с STM	 На рисунке все размеры (кроме угловых) указаны в мм. * - размеры одинаковы для всех артикулов.	HA4010st	4,0	1,0	6,0	0,098
		HA4015st	4,0	1,5	6,3	0,19
		HA4020st	4,0	2,0	6,6	0,22
		HA4025st	4,0	2,5	7,1	0,294
		HA4030st	4,0	3,0	8,0	0,376
		HA4035st	4,0	3,5	8,3	0,204
		HA4040st	4,0	4,0	8,6	0,228
		HA4045st	4,0	4,5	8,9	0,302
		HA4050st	4,0	5,0	9,2	0,384
		HA4055st	4,0	5,5	9,9	0,22
		HA4060st	4,0	6,0	10,6	0,244
		HA4065st	4,0	6,5	11,3	0,318
		HA4070st	4,0	7,0	11,6	0,4
		HA4075st	4,0	7,5	12,5	0,236
		HA4080st	4,0	8,0	13,7	0,26
		HA4510st	4,5	10	6,0	0,334
		HA4515st	4,5	1,5	6,3	0,416
		HA4520st	4,5	2	6,6	0,23
		HA4525st	4,5	2,5	7,1	0,294
		HA4530st	4,5	3,0	8,0	0,376
		HA4535st	4,5	3,5	8,3	0,382
		HA4540st	4,5	4	8,6	0,35
		HA4545st	4,5	4,5	8,9	0,436
		HA4550st	4,5	5,0	9,2	0,452
		HA4555st	4,5	5,5	9,9	0,476
		HA4560st	4,5	6	10,6	0,47
		HA4565st	4,5	6,5	11,3	0,496
		HA4570st	4,5	7,0	11,6	0,502
		HA4575st	4,5	7,5	12,5	0,526
		HA4580st	4,5	8,0	13,7	0,578
		HA5010st	5,0	10	6,0	0,098
		HA5015st	5,0	1,5	6,3	0,19
		HA5020st	5,0	2,0	6,6	0,22
		HA5025st	5,0	2,5	7,1	0,294
		HA5030st	5,0	3,0	8,0	0,376
		HA5035st	5,0	3,5	8,3	0,382
		HA5040st	5,0	4,0	8,6	0,416
		HA5045st	5,0	4,5	8,9	0,436
		HA5050st	5,0	5,0	9,2	0,452
		HA5055st	5,0	5,5	9,9	0,476
		HA5060st	5,0	6,0	10,6	0,487
		HA5065st	5,0	6,5	11,3	0,496
		HA5070st	5,0	7,0	11,6	0,502
		HA5075st	5,0	7,5	12,5	0,526
		HA5080st	5,0	8,0	13,7	0,578
		HA5510st	5,5	10	6,0	0,098
		HA5515st	5,5	1,5	6,3	0,19
		HA5520st	5,5	2,0	6,6	0,22
		HA5525st	5,5	2,5	7,1	0,294
		HA5530st	5,5	3,0	8,0	0,376
		HA5535st	5,5	3,5	8,3	0,382
		HA5540st	5,5	4,0	8,6	0,416
		HA5545st	5,5	4,5	8,9	0,436
		HA5550st	5,5	5,0	9,2	0,452
		HA5555st	5,5	5,5	9,9	0,476

		HA5560st	5,5	6,0	10,6	0,487
		HA5565st	5,5	6,5	11,3	0,496
		HA5570st	5,5	7,0	11,6	0,502
		HA5575st	5,5	7,5	12,5	0,526
		HA5580st	5,5	8,0	13,7	0,578

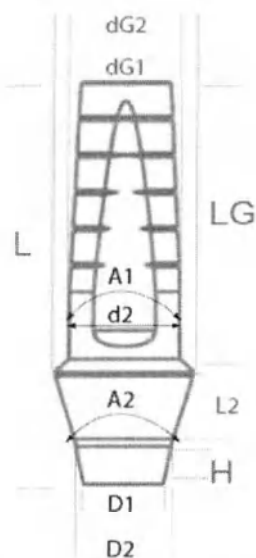
Абатмент двойной

Абатмент двойной с шестигранником											
Внешний вид											
	Общая длина (L): 12 мм										
Номенклатура	dG1, мм	dG2, мм	LG, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	d2, мм	H, мм
DAL4500SH	4,5	4	4	0,124	2,4	2	90	0	22	3,3	2,5
DAL4500MH	4,5	4,2	4	0,132	2,4	2	90	1	22	3,3	2,5
DAL4500LH	4,5	4,3	4	0,14	2,4	2	90	2	22	3,3	2,5
DAL4510SH	4,5	5	4	0,148	2,4	2	90	3	22	3,3	2,5
DAL4510MH	4,5	5,2	4	0,156	2,4	2	90	4	22	3,3	2,5
DAL4510LH	4,5	5,3	4	0,164	2,4	2	90	5	22	3,3	2,5
DAL4520SH	4,5	6	4	0,134	2,4	2	90	0	22	3,3	2,5
DAL4520MH	4,5	6,2	4	0,142	2,4	2	90	1	22	3,3	2,5
DAL4520LH	4,5	6,3	4	0,15	2,4	2	90	2	22	3,3	2,5
DAL4530SH	4,5	4	7	0,158	2,4	2	90	3	22	3,3	2,5
DAL4530MH	4,5	4,2	7	0,166	2,4	2	90	4	22	3,3	2,5
DAL4530LH	4,5	4,3	7	0,174	2,4	2	90	5	22	3,3	2,5
DAL4540SH	4,5	5	7	0,144	2,4	2	90	0	22	3,3	2,5
DAL4540MH	4,5	5,2	7	0,152	2,4	2	90	1	22	3,3	2,5
DAL4540LH	4,5	5,3	7	0,16	2,4	2	90	2	22	3,3	2,5
DAL4550SH	4,5	6	7	0,168	2,4	2	90	3	22	3,3	2,5
DAL4550MH	4,5	6,2	7	0,176	2,4	2	90	4	22	3,3	2,5
DAL4550LH	4,5	6,3	7	0,184	2,4	2	90	5	22	3,3	2,5
DAL5500SH	5,5	4	10	0,184	2,4	2	90	0	22	3,3	2,5
DAL5500MH	5,5	4,2	10	0,184	2,4	2	90	1	22	3,3	2,5
DAL5500LH	5,5	4,3	10	0,184	2,4	2	90	2	22	3,3	2,5
DAL5510SH	5,5	5	10	0,184	2,4	2	90	3	22	3,3	2,5
DAL5510MH	5,5	5,2	10	0,184	2,4	2	90	4	22	3,3	2,5
DAL5510LH	5,5	5,3	10	0,184	2,4	2	90	5	22	3,3	2,5
DAL5520SH	5,5	6	10	0,184	2,4	2	90	0	22	3,3	2,5
DAL5520MH	5,5	6,2	10	0,184	2,4	2	90	1	22	3,3	2,5

DAL5520LH	5,5	6,3	10	0,184	2,4	2	90	2	22	3,3	2,5
DAL5530SH	5,5	4	10	0,184	2,4	2	90	3	22	3,3	2,5
DAL5530MH	5,5	4,2	10	0,184	2,4	2	90	4	22	3,3	2,5
DAL5530LH	5,5	4,3	10	0,184	2,4	2	90	5	22	3,3	2,5
DAL5540SH	5,5	5	10	0,184	2,4	2	90	0	22	3,3	2,5
DAL5540MH	5,5	5,2	10	0,184	2,4	2	90	1	22	3,3	2,5
DAL5540LH	5,5	5,3	10	0,184	2,4	2	90	2	22	3,3	2,5
DAL5550SH	5,5	6	10	0,184	2,4	2	90	3	22	3,3	2,5
DAL5550MH	5,5	6,2	10	0,184	2,4	2	90	4	22	3,3	2,5
DAL5550LH	5,5	6,3	10	0,184	2,4	2	90	5	22	3,3	2,5
DAL6500SH	6,5	5	10	0,184	2,4	2	90	0	22	3,3	2,5
DAL6500MH	6,5	5,2	10	0,184	2,4	2	90	1	22	3,3	2,5
DAL6500LH	6,5	5,3	10	0,184	2,4	2	90	2	22	3,3	2,5
DAL6510SH	6,5	6	10	0,184	2,4	2	90	3	22	3,3	2,5
DAL6510MH	6,5	6,2	10	0,184	2,4	2	90	4	22	3,3	2,5
DAL6510LH	6,5	6,3	10	0,184	2,4	2	90	5	22	3,3	2,5
DAL6520SH	6,5	6,687	10	0,184	2,4	2	90	0	22	3,3	2,5
DAL6520MH	6,5	6,978	10	0,184	2,4	2	90	1	22	3,3	2,5
DAL6520LH	6,5	7,27	10	0,184	2,4	2	90	2	22	3,3	2,5
DAL6530SH	6,5	7,561	10	0,184	2,4	2	90	3	22	3,3	2,5
DAL6530MH	6,5	7,852	10	0,184	2,4	2	90	4	22	3,3	2,5
DAL6530LH	6,5	8,144	10	0,184	2,4	2	90	5	22	3,3	2,5
DAL6540SH	6,5	8,435	10	0,184	2,4	2	90	0	22	3,3	2,5
DAL6540MH	6,5	8,727	10	0,184	2,4	2	90	1	22	3,3	2,5
DAL6540LH	6,5	9,018	10	0,184	2,4	2	90	2	22	3,3	2,5
DAL6550SH	6,5	9,31	10	0,184	2,4	2	90	3	22	3,3	2,5
DAL6550MH	6,5	9,601	10	0,184	2,4	2	90	4	22	3,3	2,5
DAL6550LH	6,5	9,601	10	0,184	2,4	2	90	5	22	3,3	2,5

Абатмент двойной без шестигранника

Внешний вид



Общая длина (L): 12 мм

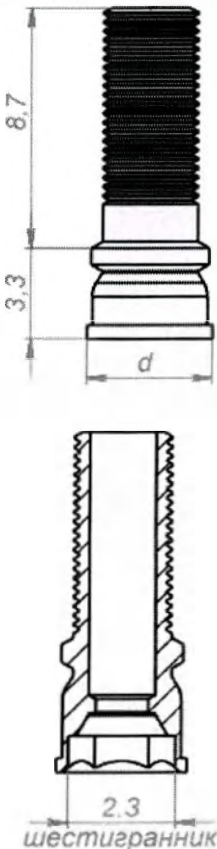
Номенклатура	dG1, мм	dG2, мм	LG, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	d2, мм	H, мм
DAL4500SN	4,5	4	4	0,124	2,4	2	90	0	22	3,3	2,5
DAL4500MN	4,5	4,2	4	0,132	2,4	2	90	1	22	3,3	2,5
DAL4500LN	4,5	4,3	4	0,14	2,4	2	90	2	22	3,3	2,5
DAL4510SN	4,5	5	4	0,148	2,4	2	90	3	22	3,3	2,5
DAL4510MN	4,5	5,2	4	0,156	2,4	2	90	4	22	3,3	2,5
DAL4510LN	4,5	5,3	4	0,164	2,4	2	90	5	22	3,3	2,5

DAL4520SN	4,5	6	4	0,134	2,4	2	90	0	22	3,3	2,5
DAL4520MN	4,5	6,2	4	0,142	2,4	2	90	1	22	3,3	2,5
DAL4520LN	4,5	6,3	4	0,15	2,4	2	90	2	22	3,3	2,5
DAL4530SN	4,5	4	7	0,158	2,4	2	90	3	22	3,3	2,5
DAL4530MN	4,5	4,2	7	0,166	2,4	2	90	4	22	3,3	2,5
DAL4530LN	4,5	4,3	7	0,174	2,4	2	90	5	22	3,3	2,5
DAL4540SN	4,5	5	7	0,144	2,4	2	90	0	22	3,3	2,5
DAL4540MN	4,5	5,2	7	0,152	2,4	2	90	1	22	3,3	2,5
DAL4540LN	4,5	5,3	7	0,16	2,4	2	90	2	22	3,3	2,5
DAL4550SN	4,5	6	7	0,168	2,4	2	90	3	22	3,3	2,5
DAL4550MN	4,5	6,2	7	0,176	2,4	2	90	4	22	3,3	2,5
DAL4550LN	4,5	6,3	7	0,184	2,4	2	90	5	22	3,3	2,5
DAL5500SN	5,5	4	10	0,184	2,4	2	90	0	22	3,3	2,5
DAL5500MN	5,5	4,2	10	0,184	2,4	2	90	1	22	3,3	2,5
DAL5500LN	5,5	4,3	10	0,184	2,4	2	90	2	22	3,3	2,5
DAL5510SN	5,5	5	10	0,184	2,4	2	90	3	22	3,3	2,5
DAL5510MN	5,5	5,2	10	0,184	2,4	2	90	4	22	3,3	2,5
DAL5510LN	5,5	5,3	10	0,184	2,4	2	90	5	22	3,3	2,5
DAL5520SN	5,5	6	10	0,184	2,4	2	90	0	22	3,3	2,5
DAL5520MN	5,5	6,2	10	0,184	2,4	2	90	1	22	3,3	2,5
DAL5520LN	5,5	6,3	10	0,184	2,4	2	90	2	22	3,3	2,5
DAL5530SN	5,5	4	10	0,184	2,4	2	90	3	22	3,3	2,5
DAL5530MN	5,5	4,2	10	0,184	2,4	2	90	4	22	3,3	2,5
DAL5530LN	5,5	4,3	10	0,184	2,4	2	90	5	22	3,3	2,5
DAL5540SN	5,5	5	10	0,184	2,4	2	90	0	22	3,3	2,5
DAL5540MN	5,5	5,2	10	0,184	2,4	2	90	1	22	3,3	2,5
DAL5540LN	5,5	5,3	10	0,184	2,4	2	90	2	22	3,3	2,5
DAL5550SN	5,5	6	10	0,184	2,4	2	90	3	22	3,3	2,5
DAL5550MN	5,5	6,2	10	0,184	2,4	2	90	4	22	3,3	2,5
DAL5550LN	5,5	6,3	10	0,184	2,4	2	90	5	22	3,3	2,5
DAL6500SN	6,5	5	10	0,184	2,4	2	90	0	22	3,3	2,5
DAL6500MN	6,5	5,2	10	0,184	2,4	2	90	1	22	3,3	2,5
DAL6500LN	6,5	5,3	10	0,184	2,4	2	90	2	22	3,3	2,5
DAL6510SN	6,5	6	10	0,184	2,4	2	90	3	22	3,3	2,5
DAL6510MN	6,5	6,2	10	0,184	2,4	2	90	4	22	3,3	2,5
DAL6510LN	6,5	6,3	10	0,184	2,4	2	90	5	22	3,3	2,5
DAL6520SN	6,5	6,687	10	0,184	2,4	2	90	0	22	3,3	2,5
DAL6520MN	6,5	6,978	10	0,184	2,4	2	90	1	22	3,3	2,5
DAL6520LN	6,5	7,27	10	0,184	2,4	2	90	2	22	3,3	2,5
DAL6530SN	6,5	7,561	10	0,184	2,4	2	90	3	22	3,3	2,5
DAL6530MN	6,5	7,852	10	0,184	2,4	2	90	4	22	3,3	2,5
DAL6530LN	6,5	8,144	10	0,184	2,4	2	90	5	22	3,3	2,5
DAL6540SN	6,5	8,435	10	0,184	2,4	2	90	0	22	3,3	2,5
DAL6540MN	6,5	8,727	10	0,184	2,4	2	90	1	22	3,3	2,5
DAL6540LN	6,5	9,018	10	0,184	2,4	2	90	2	22	3,3	2,5
DAL6550SN	6,5	9,31	10	0,184	2,4	2	90	3	22	3,3	2,5
DAL6550MN	6,5	9,601	10	0,184	2,4	2	90	4	22	3,3	2,5
DAL6550LN	6,5	9,601	10	0,184	2,4	2	90	5	22	3,3	2,5

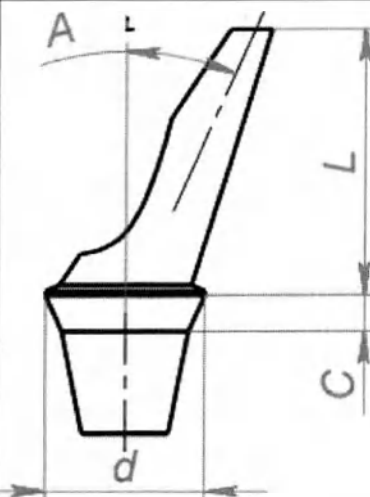
Абатмент временный

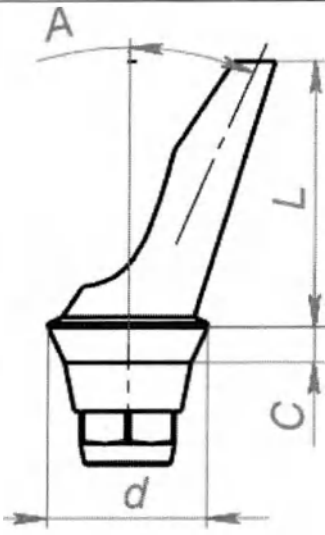
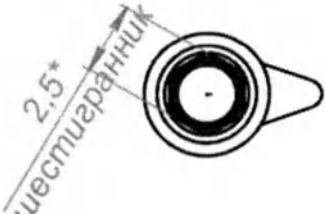
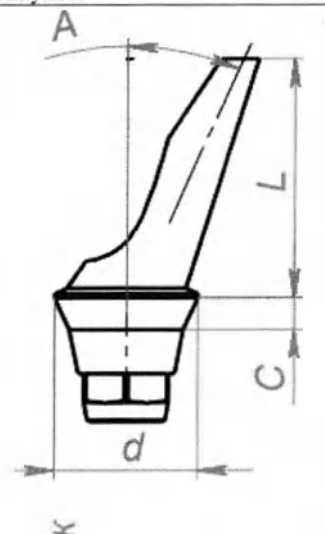
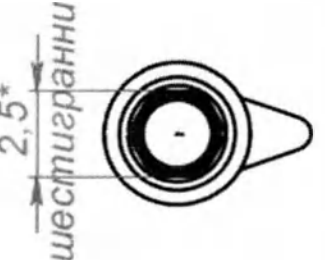
Наименование	Внешний вид	Номенклатура	d, мм	C, мм	L, мм	Общая длина, мм	Вес, г
Абатмент временный		TA4510N	4.5	1.0	10	13,8	0,22
		TA4520N	4.5	1.0	20	23,8	0,24
		TA5510N	5.5	1.0	10	13,8	0,235
		TA5520N	5.5	1.0	20	23,8	0,255
Абатмент временный шестигранный	шестигранник На рисунке все размеры указаны в мм. * - размеры одинаковы для всех артикулов.	TA4510H	4.5	1.0	10	13,8	0,245
		TA4520H	4.5	1.0	20	23,8	0,265
		TA5510H	5.5	1.0	10	13,8	0,26
		TA5520H	5.5	1.0	20	23,8	0,28

Абатмент временный мультиюнит

Наименование	Внешний вид	Номенклатура	d, мм	Шестигранник	Вес, г
Абатмент временный мультиюнит	 На рисунке все размеры указаны в мм. Размеры одинаковы для всех артикулов.	BSTC45S-N/D	4.5	+	0,245
		BSTC55S-N/D	4.5	-	0,265
		BSTC45B-N/D	5.5	+	0,26
		BSTC55B-N/D	5.5	-	0,28

Абатмент угловой

Наименование	Внешний вид	Номенклатура	C, мм	L, мм	d, мм	A	Общая длина, мм	Вес, г
Абатмент угловой, угол 15°		ANA450015N	0	8.0	4.5	15°	10,8	0,157
		ANA451015N	1.0	8.0	4.5	15°	11,8	0,167
		ANA452015N	2.0	8.0	4.5	15°	12,8	0,177
		ANA453015N	3.0	8.0	4.5	15°	13,8	0,187
		ANA454015N	4.0	8.0	4.5	15°	14,8	0,197
		ANA550015N	0	8.0	5.5	15°	10,8	0,16
		ANA551015N	1.0	8.0	5.5	15°	11,8	0,17
		ANA552015N	2.0	8.0	5.5	15°	12,8	0,18
		ANA553015N	3.0	8.0	5.5	15°	13,8	0,19
		ANA554015N	4.0	8.0	5.5	15°	14,8	0,2
Абатмент угловой, угол 25°		ANA450025N	0	8.0	4.5	25°	10,8	0,159
		ANA451025N	1.0	8.0	4.5	25°	11,8	0,169
		ANA452025N	2.0	8.0	4.5	25°	12,8	0,179
		ANA453025N	3.0	8.0	4.5	25°	13,8	0,189
		ANA454025N	4.0	8.0	4.5	25°	14,8	0,199
		ANA550025N	0	8.0	5.5	25°	10,8	0,164
		ANA551025N	1.0	8.0	5.5	25°	11,8	0,174
		ANA552025N	2.0	8.0	5.5	25°	12,8	0,184
		ANA553025N	3.0	8.0	5.5	25°	13,8	0,194
		ANA554025N	4.0	8.0	5.5	25°	14,8	0,204

Наименование	Внешний вид	Номенклатура	C, мм	L, мм	d, мм	A	Общая длина, мм	Вес, г
Абатмент угловой шестигранный (тип А), угол 15°		ANA450015AH	0	8.0	4.5	15°	10,8	0,162
		ANA451015AH	1.0	8.0	4.5	15°	11,8	0,172
		ANA452015AH	2.0	8.0	4.5	15°	12,8	0,182
		ANA453015AH	3.0	8.0	4.5	15°	13,8	0,192
		ANA454015AH	4.0	8.0	4.5	15°	14,8	0,202
		ANA550015AH	0	8.0	5.5	15°	10,8	0,165
		ANA551015AH	1.0	8.0	5.5	15°	11,8	0,175
		ANA552015AH	2.0	8.0	5.5	15°	12,8	0,185
		ANA553015AH	3.0	8.0	5.5	15°	13,8	0,195
		ANA554015AH	4.0	8.0	5.5	15°	14,8	0,205
Абатмент угловой шестигранный (тип А), угол 25°		ANA450025AH	0	8.0	4.5	25°	10,8	0,164
		ANA451025AH	1.0	8.0	4.5	25°	11,8	0,174
		ANA452025AH	2.0	8.0	4.5	25°	12,8	0,184
		ANA453025AH	3.0	8.0	4.5	25°	13,8	0,194
		ANA454025AH	4.0	8.0	4.5	25°	14,8	0,204
		ANA550025AH	0	8.0	5.5	25°	10,8	0,169
		ANA551025AH	1.0	8.0	5.5	25°	11,8	0,179
		ANA552025AH	2.0	8.0	5.5	25°	12,8	0,189
		ANA553025AH	3.0	8.0	5.5	25°	13,8	0,199
		ANA554025AH	4.0	8.0	5.5	25°	14,8	0,209
Абатмент угловой шестигранный (тип В), угол 15°		ANA450015BH	0	8.0	4.5	15°	10,8	0,162
		ANA451015BH	1.0	8.0	4.5	15°	11,8	0,172
		ANA452015BH	2.0	8.0	4.5	15°	12,8	0,182
		ANA453015BH	3.0	8.0	4.5	15°	13,8	0,192
		ANA454015BH	4.0	8.0	4.5	15°	14,8	0,202
		ANA550015BH	0	8.0	5.5	15°	10,8	0,165
		ANA551015BH	1.0	8.0	5.5	15°	11,8	0,175
		ANA552015BH	2.0	8.0	5.5	15°	12,8	0,185
		ANA553015BH	3.0	8.0	5.5	15°	13,8	0,195
		ANA554015BH	4.0	8.0	5.5	15°	14,8	0,205
Абатмент угловой шестигранный (тип В), угол 25°		ANA450025BH	0	8.0	4.5	25°	10,8	0,164
		ANA451025BH	1.0	8.0	4.5	25°	11,8	0,174
		ANA452025BH	2.0	8.0	4.5	25°	12,8	0,184
		ANA453025BH	3.0	8.0	4.5	25°	13,8	0,194
		ANA454025BH	4.0	8.0	4.5	25°	14,8	0,204
		ANA550025BH	0	8.0	5.5	25°	10,8	0,169
		ANA551025BH	1.0	8.0	5.5	25°	11,8	0,179
		ANA552025BH	2.0	8.0	5.5	25°	12,8	0,189
		ANA553025BH	3.0	8.0	5.5	25°	13,8	0,199
		ANA554025BH	4.0	8.0	5.5	25°	14,8	0,209

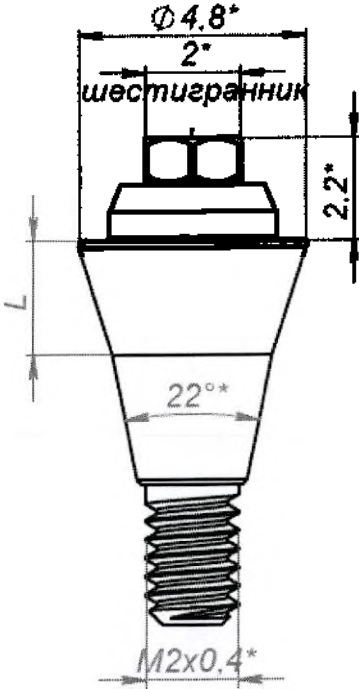
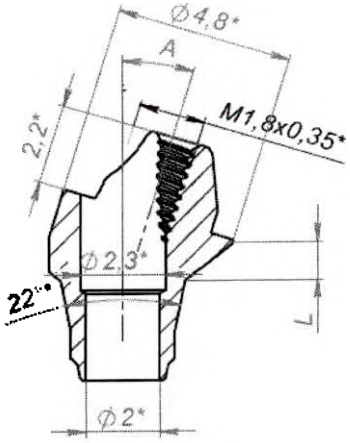
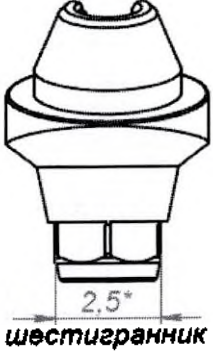
На рисунке все размеры (кроме угловых) указаны в мм.

* - размеры одинаковы для всех артикулов.

На рисунке все размеры (кроме угловых) указаны в мм.

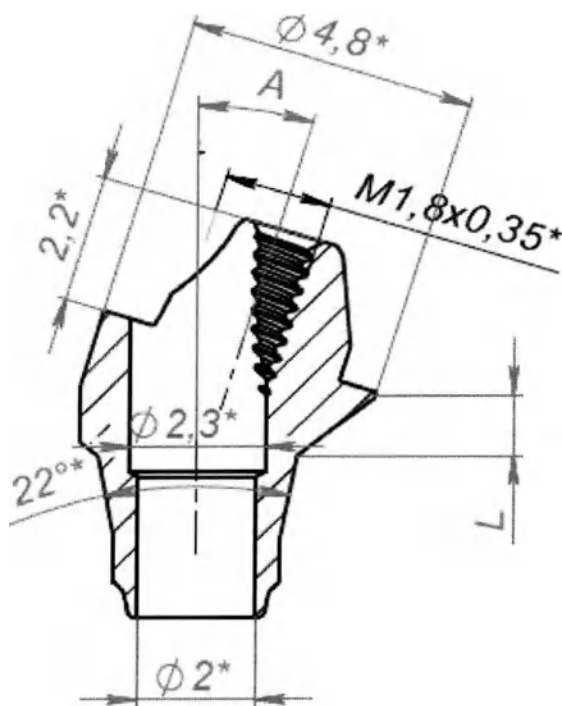
* - размеры одинаковы для всех артикулов.

Абатмент мультиюнит

Наименование	Внешний вид	Номенклатура	L, мм	A	Общая длина, мм	Вес, г
Абатмент мультиюнит	 На рисунке все размеры (кроме угловых) указаны в мм. * - размеры одинаковы для всех артикулов.	BMU0015	1.5	0°	9,5	0,12
		BMU0025	2.5	0°	10,5	0,15
		BMU0035	3.5	0°	11,5	0,18
		BMU0045	4.5	0°	12,5	0,21
Абатмент угловой мультиюнит, угол 17°		BMU1725	2.5	17°	8,3	0,13
		BMU1735	3.5	17°	9,3	0,16
		BMU1745	4.5	17°	10,3	0,19
Абатмент угловой мультиюнит, угол 30°	 На рисунке все размеры (кроме угловых) указаны в мм. * - размеры одинаковы для всех артикулов.	BMU3035	3.5	30°	8,9	0,165
		BMU3045	4.5	30°	9,9	0,195

Абатмент угловой мультиюнит, угол 45°

Внешний вид



На рисунке все размеры (кроме угловых) указаны в мм.

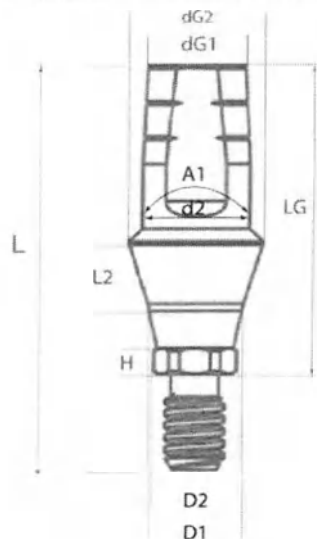
* - размеры одинаковы для всех артикулов.

Номенклатура	L, мм	A	Общая длина, мм	Вес, г
BMU4535	3,5	45°	8,5	0,142
BMU4545	4,5	45°	9,5	0,152

Абатмент комбинированный

Абатмент комбинированный короткий

Внешний вид

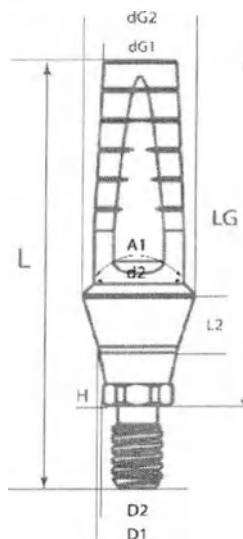


Общая длина (L): 9 мм

Номенклатура	dG1, мм	dG2, мм	LG, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	d2, мм	H, мм
BSTBH40	3,5	4	4	0,124	2,4	2	90	0	3,3	2,5
BSTBH42	3,5	4,2	4	0,132	2,4	2	90	1	3,3	2,5
BSTBH43	3,5	4,3	4	0,14	2,4	2	90	2	3,3	2,5
BSTBH50	3,5	5	4	0,148	2,4	2	90	3	3,3	2,5
BSTBH52	3,5	5,2	4	0,156	2,4	2	90	4	3,3	2,5
BSTBH53	3,5	5,3	4	0,164	2,4	2	90	5	3,3	2,5
BSTBH60	3,5	6	4	0,134	2,4	2	90	0	3,3	2,5
BSTBH62	3,5	6,2	4	0,142	2,4	2	90	1	3,3	2,5
BSTBH63	3,5	6,3	4	0,15	2,4	2	90	2	3,3	2,5

Абатмент комбинированный длинный

Внешний вид

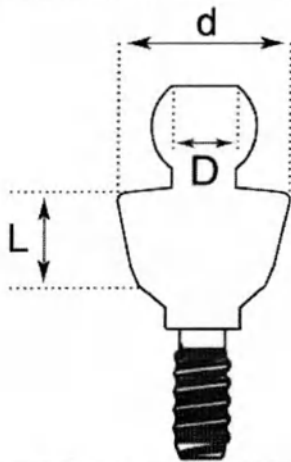


Общая длина (L): 12 мм

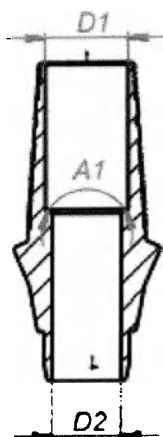
Номенклатура	dG1, мм	dG2, мм	LG, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	d2, мм	H, мм
BLTBH40	3,5	4	7	0,158	2,4	2	90	3	3,3	2,5
BLTBH42	3,5	4,2	7	0,166	2,4	2	90	4	3,3	2,5
BLTBH43	3,5	4,3	7	0,174	2,4	2	90	5	3,3	2,5
BLTBH50	3,5	5	7	0,144	2,4	2	90	0	3,3	2,5

BLTBH52	3,5	5,2	7	0,152	2,4	2	90	1	3,3	2,5
BLTBH53	3,5	5,3	7	0,16	2,4	2	90	2	3,3	2,5
BLTBH60	3,5	6	7	0,168	2,4	2	90	3	3,3	2,5
BLTBH62	3,5	6,2	7	0,176	2,4	2	90	4	3,3	2,5
BLTBH63	3,5	6,3	7	0,184	2,4	2	90	5	3,3	2,5

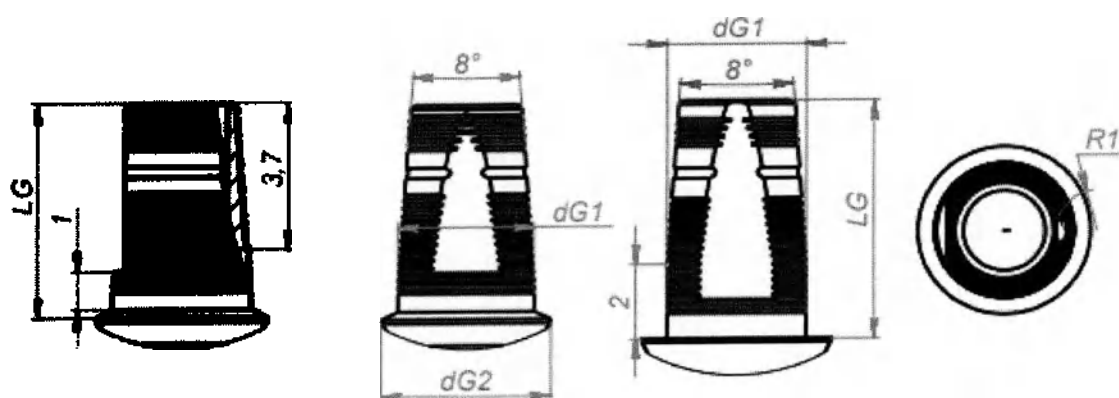
Абатмент шариковый

Абатмент шариковый					
Внешний вид					
	Номенклатура	d, мм	D, мм	L, мм	Общая длина, мм
	BBAT41	4	2	4	12
					Вес, г
					0,142

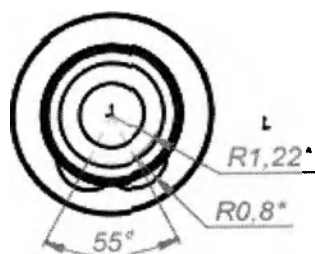
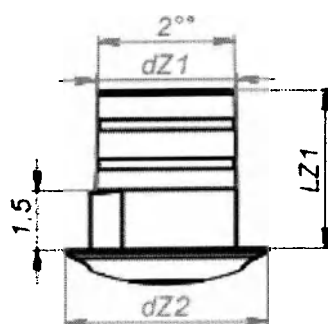
Основание титановое



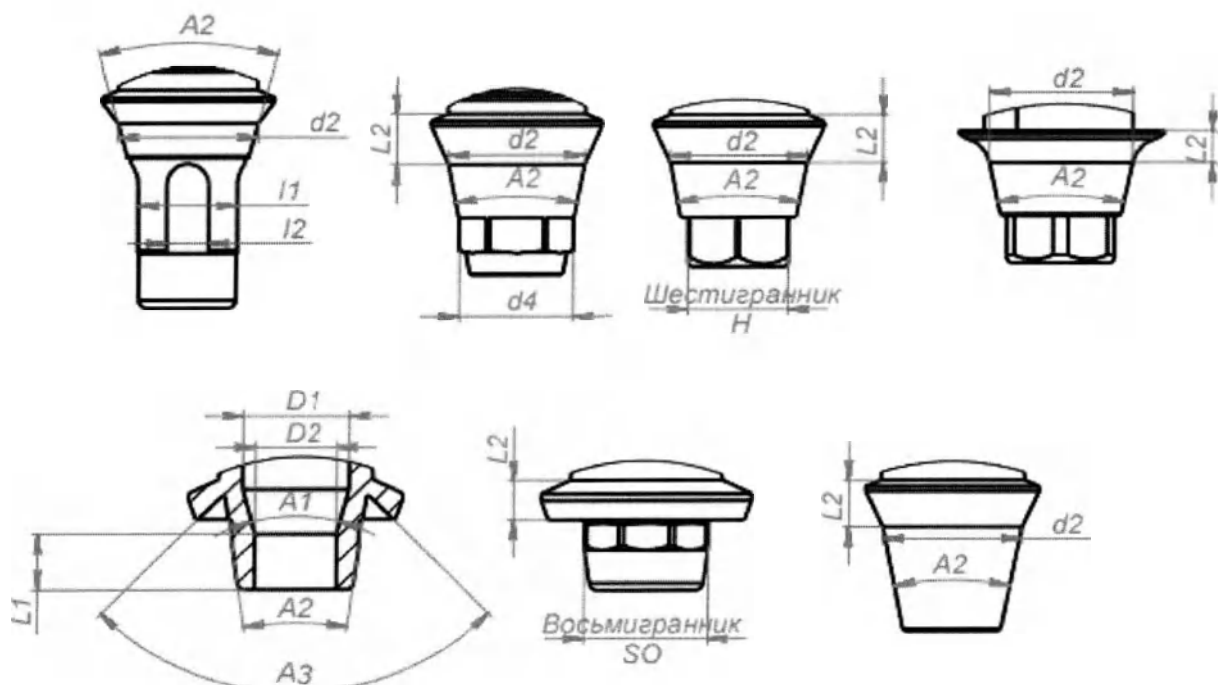
Общий вид (схематично)



Интерфейс коронки вариант 1



Интерфейс коронки вариант 2



Интерфейс имплантата

	Интерфейс коронки вариант 1					Интерфейс имплантата										
	Номенклатура	dG1 мм	dG2 мм	LG, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	I1, мм	I2, мм	H, мм	SO, мм
Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с OSSTEM IMPLANT TS	BGOM135-SC/U	3,4	4	5,2	0,134	2,3	1,6	90	1,3	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	BGOM235-SC/U	3,4	4	6	0,17	2,3	1,6	90	2	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	BGOM335-SC/U	3,4	4	6	0,19	2,3	1,6	90	3	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	BGOM135-FC/U	3,4	4	4	0,134	2,3	1,6	90	1,3	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	BGOM235-FC/U	3,4	4	4	0,16	2,3	1,6	90	2	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	BGOM335-FC/U	3,4	4	4	0,18	2,3	1,6	90	3	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	BGOR140-SC/U	3,5	4,2	5,2	0,143	2,4	2	90	1,3	22	-	3,33	-	-	2,5	-
	BGOR240-SC/U	3,5	4,2	6	0,186	2,4	2	90	2	22	-	3,33	-	-	2,5	-
	BGOR340-SC/U	3,5	4,2	6	0,229	2,4	2	90	3	22	-	3,33	-	-	2,5	-
	BGOR140-FC/U	3,5	4,2	4	0,132	2,4	2	90	1,3	22	-	3,33	-	-	2,5	-
	BGOR240-FC/U	3,5	4,2	4	0,164	2,4	2	90	2	22	-	3,33	-	-	2,5	-
	BGOR340-FC/U	3,5	4,2	4	0,202	2,4	2	90	3	22	-	3,33	-	-	2,5	-
Основание титановое (тип 1), совместимо с OSSTEM IMPLANT TS	BGOM135-BC/U	3,4	4	5,2	0,139	2,3	1,6	90	1,3	22	-	2,8	-	-	-	-
	BGOM235-BC/U	3,4	4	6	0,165	2,3	1,6	90	2	22	-	2,8	-	-	-	-
	BGOM335-BC/U	3,4	4	6	0,185	2,3	1,6	90	3	22	-	2,8	-	-	-	-
	BGOR140-BC/U	3,5	4,2	5,2	0,139	2,4	2	90	1,3	22	-	3,33	-	-	-	-
	BGOR240-BC/U	3,5	4,2	6	0,181	2,4	2	90	2	22	-	3,33	-	-	-	-
	BGOR340-BC/U	3,5	4,2	6	0,224	2,4	2	90	3	22	-	3,33	-	-	-	-
	Интерфейс коронки вариант 2					Интерфейс имплантата										
	Номенклатура	dZ1 мм	dZ2 мм	LZ1, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	I1, мм	I2, мм	H, мм	SO, мм
Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с OSSTEM IMPLANT TS	BZOM135-SC/U	3,1	4,6	4	0,11	2,3	1,6	90	1,3	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	BZOM235-SC/U	3,2	4,8	4	0,14	2,3	1,6	90	2	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	BZOM335-SC/U	3,2	4,8	4	0,17	2,3	1,6	90	3	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	BZOM135-FC/U	3,1	4,6	3	0,1	2,3	1,6	90	1,3	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	BZOM235-FC/U	3,1	4,6	3	0,13	2,3	1,6	90	2	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	BZOM335-FC/U	3,1	4,6	3	0,15	2,3	1,6	90	3	22	-	2,8	-	-	2,1	-

Основание титановое (тип 2), совместимо с OSSTEM IMPLANT TS	BZOR140-SC/U	3,2	4,8	4	0,13	2,4	2	90	1,3	22	-	3,33	-	-	2,5	-
	BZOR240-SC/U	3,3	5,2	4	0,15	2,4	2	90	2	22	-	3,33	-	-	2,5	-
	BZOR340-SC/U	3,3	5,2	4	0,17	2,4	2	90	3	22	-	3,33	-	-	2,5	-
	BZOR140-FC/U	3,1	4,6	3	0,125	2,4	2	90	1,3	22	-	3,33	-	-	2,5	-
	BZOR240-FC/U	3,1	4,6	3	0,143	2,4	2	90	2	22	-	3,33	-	-	2,5	-
	BZOR340-FC/U	3,1	4,6	3	0,165	2,4	2	90	3	22	-	3,33	-	-	2,5	-
	BZOM135-BC/U	3,1	4,6	4	0,105	2,3	1,6	90	1,3	22	-	2,8	-	-	-	-
	BZOM235-BC/U	3,2	4,8	4	0,135	2,3	1,6	90	2	22	-	2,8	-	-	-	-
	BZOM335-BC/U	3,2	4,8	4	0,165	2,3	1,6	90	3	22	-	2,8	-	-	-	-
	BZOR140-BC/U	3,1	4,6	4	0,125	2,4	2	90	1,3	22	-	3,33	-	-	-	-
	BZOR240-BC/U	3,2	4,8	4	0,145	2,4	2	90	2	22	-	3,33	-	-	-	-
	BZOR340-BC/U	3,2	4,8	4	0,165	2,4	2	90	3	22	-	3,33	-	-	-	-

	Интерфейс коронки вариант 1					Интерфейс имплантата										
	Номенклатура	dG1 мм	dG2 мм	LG, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	I1, мм	I2, мм	H, мм	SO, мм
Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с DENTIUM SUPERLINE	BGDI137-SC/U	3,5	4,2	5,2	0,15	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BGDI237-SC/U	3,5	4,3	6	0,197	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BGDI337-SC/U	3,5	4,3	6	0,235	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BGDI137-FC/U	3,5	4,3	4	0,15	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BGDI237-FC/U	3,5	4,3	4	0,197	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BGDI337-FC/U	3,5	4,3	4	0,235	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
Основание титановое (тип 1), совместимо с DENTIUM SUPERLINE	BGDI137-BC/U	3,5	4,2	5,2	0,145	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	-	-
	BGDI237-BC/U	3,5	4,3	6	0,192	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	-	-
	BGDI337-BC/U	3,5	4,3	6	0,23	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	-	-
	Интерфейс коронки вариант 2					Интерфейс имплантата										
	Номенклатура	dZ1 мм	dZ2 мм	LZ1 мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	I1, мм	I2, мм	H, мм	SO, мм
Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с DENTIUM SUPERLINE	BZDI137-SC/U	3,2	4,8	4	0,13	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BZDI237-SC/U	3,3	5,2	3	0,175	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BZDI337-SC/U	3,3	5,2	3	0,202	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BZDI137-FC/U	3,3	5,2	4	0,13	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BZDI237-FC/U	3,3	5,2	3	0,175	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BZDI337-FC/U	3,3	5,2	3	0,202	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
Основание титановое (тип 2), совместимо с DENTIUM SUPERLINE	BZDI137-BC/U	3,2	4,8	4	0,125	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	-	-
	BZDI237-BC/U	3,3	5,2	3	0,17	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	-	-
	BZDI337-BC/U	3,3	5,2	3	0,197	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	-	-

	Интерфейс коронки вариант 1					Интерфейс имплантата										
	Номенклатура	dG1 мм	dG2 мм	LG, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	I1, мм	I2, мм	H, мм	SO, мм
Основание титановое (тип 1), совместимо с STRAUMANN BONE LEVEL	BGSB133-SC/U	3,4	4	5,2	0,142	2,3	1,6	60	1,3	30	-	2,8	2,2	0,7	-	-
	BGSB233-SC/U	3,4	4	6	0,156	2,3	1,6	60	2	30	-	2,8	2,2	0,7	-	-
	BGSB333-SC/U	3,4	4	6	0,176	2,3	1,6	60	3	30	-	2,8	2,2	0,7	-	-
	BGSB133-BC/U	3,4	4	5,2	0,13	2,3	1,6	60	1,3	30	-	2,8	-	-	-	-
	BGSB233-BC/U	3,4	4	6	0,144	2,3	1,6	60	2	30	-	2,8	-	-	-	-
	BGSB333-BC/U	3,4	4	6	0,164	2,3	1,6	60	3	30	-	2,8	-	-	-	-
	BGSB133-FC/U	3,4	4	4	0,136	2,3	1,6	60	1,3	30	-	2,8	2,2	0,7	-	-
	BGSB233-FC/U	3,4	4	4	0,15	2,3	1,6	60	2	30	-	2,8	2,2	0,7	-	-
	BGSB333-FC/U	3,4	4	4	0,17	2,3	1,6	60	3	30	-	2,8	2,2	0,7	-	-
	BGSB141-SC/U	3,5	4,2	5,2	0,151	2,3	1,6	60	1,3	30	-	3,3	2,4	1	-	-
	BGSB241-SC/U	3,5	4,2	6	0,165	2,3	1,6	60	2	30	-	3,3	2,4	1	-	-

	BGSB341-SC/U	3,5	4,2	6	0,185	2,3	1,6	60	3	30	-	3,3	2,4	1	-	-
	BGSB141-BC/U	3,5	4,2	5,2	0,141	2,3	1,6	60	1,3	30	-	3,3	-	-	-	-
	BGSB241-BC/U	3,5	4,2	6	0,155	2,3	1,6	60	2	30	-	3,3	-	-	-	-
	BGSB341-BC/U	3,5	4,2	6	0,175	2,3	1,6	60	3	30	-	3,3	-	-	-	-
	BGSB141-FC/U	3,5	4,2	4	0,145	2,3	1,6	60	1,3	30	-	3,3	2,4	1	-	-
	BGSB241-FC/U	3,5	4,2	4	0,159	2,3	1,6	60	2	30	-	3,3	2,4	1	-	-
	BGSB341-FC/U	3,5	4,2	4	0,179	2,3	1,6	60	3	30	-	3,3	2,4	1	-	-
	Интерфейс коронки вариант 2					Интерфейс имплантата										
	Номенклатура	dZ1,	dZ2,	LZ1,	Вес,	D1,	D2,	A1,	L2,	A2,	A3,	d2,	l1,	l2,	H,	SO,
		мм	мм	мм	г	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
Основание титановое (тип 2), совместимо с STRAUMANN BONE LEVEL	BZSB133-SC/U	3,2	4,8	4	0,127	2,3	1,6	60	1,3	30	-	2,8	2,2	0,7	-	-
	BZSB233-SC/U	3,2	4,8	4	0,141	2,3	1,6	60	2	30	-	2,8	2,2	0,7	-	-
	BZSB333-SC/U	3,2	4,8	4	0,161	2,3	1,6	60	3	30	-	2,8	2,2	0,7	-	-
	BZSB133-BC/U	3,2	4,8	4	0,115	2,3	1,6	60	1,3	30	-	2,8	-	-	-	-
	BZSB233-BC/U	3,2	4,8	4	0,129	2,3	1,6	60	2	30	-	2,8	-	-	-	-
	BZSB333-BC/U	3,2	4,8	4	0,149	2,3	1,6	60	3	30	-	2,8	-	-	-	-
	BZSB133-FC/U	3,2	4,8	3	0,121	2,3	1,6	60	1,3	30	-	2,8	2,2	0,7	-	-
	BZSB233-FC/U	3,2	4,8	3	0,135	2,3	1,6	60	2	30	-	2,8	2,2	0,7	-	-
	BZSB333-FC/U	3,2	4,8	3	0,155	2,3	1,6	60	3	30	-	2,8	2,2	0,7	-	-
	BZSB141-SC/U	3,3	5,2	4	0,136	2,3	1,6	60	1,3	30	-	3,3	2,4	1	-	-
	BZSB241-SC/U	3,3	5,2	4	0,15	2,3	1,6	60	2	30	-	3,3	2,4	1	-	-
	BZSB341-SC/U	3,3	5,2	4	0,17	2,3	1,6	60	3	30	-	3,3	2,4	1	-	-
	BZSB141-BC/U	3,3	5,2	4	0,126	2,3	1,6	60	1,3	30	-	3,3	-	-	-	-
	BZSB241-BC/U	3,3	5,2	4	0,14	2,3	1,6	60	2	30	-	3,3	-	-	-	-
	BZSB341-BC/U	3,3	5,2	4	0,16	2,3	1,6	60	3	30	-	3,3	-	-	-	-
	BZSB141-FC/U	3,3	5,2	3	0,13	2,3	1,6	60	1,3	30	-	3,3	2,4	1	-	-
	BZSB241-FC/U	3,3	5,2	3	0,144	2,3	1,6	60	2	30	-	3,3	2,4	1	-	-
	BZSB341-FC/U	3,3	5,2	3	0,164	2,3	1,6	60	3	30	-	3,3	2,4	1	-	-

	Интерфейс коронки вариант 1					Интерфейс имплантата										
	Номенклатура	dG1,	dG2,	LG,	Вес,	D1,	D2,	A1,	L2,	A2,	A3,	d2,	l1,	l2,	H,	SO,
		мм	мм	мм	г	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
Основание титановое (тип 1) восьмигранное, совместимо с STRAUMANN TISSUE LEVEL	BGST148-SC/U	3,4	5	5,2	0,174	2,4	2	60	1	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGST248-SC/U	3,4	5	6	0,188	2,4	2	60	2	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGST348-SC/U	3,4	5	6	0,208	2,4	2	60	3	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGST148-RC/U	3,5	5,1	4	0,168	2,4	2	60	1	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGST248-RC/U	3,5	5,1	4	0,182	2,4	2	60	2	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGST348-RC/U	3,5	5,1	4	0,202	2,4	2	60	3	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGST165-SC/U	3,5	5,2	5,2	0,179	2,4	2	60	1	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BGST265-SC/U	3,5	5,2	6	0,193	2,4	2	60	2	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BGST365-SC/U	3,5	5,2	6	0,213	2,4	2	60	3	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BGST165-RC/U	3,5	5,2	4	0,17	2,4	2	60	1	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BGST265-RC/U	3,5	5,2	4	0,184	2,4	2	60	2	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BGST365-RC/U	3,5	5,2	4	0,204	2,4	2	60	3	16	90	4,9	-	-	-	3,3
Основание титановое (тип 1), совместимо с STRAUMANN TISSUE LEVEL	BGST148-BC/U	3,5	5	5,2	0,171	2,4	2	60	1	16	90	4,9	-	-	-	-
	BGST248-BC/U	3,5	5	6	0,185	2,4	2	60	2	16	90	4,9	-	-	-	-
	BGST348-BC/U	3,5	5	6	0,205	2,4	2	60	3	16	90	4,9	-	-	-	-
	BGST165-BC/U	3,5	5,2	5,2	0,176	2,4	2	60	1	16	90	4,9	-	-	-	-
	BGST265-BC/U	3,5	5,2	6	0,19	2,4	2	60	2	16	90	4,9	-	-	-	-
	BGST365-BC/U	3,5	5,2	6	0,21	2,4	2	60	3	16	90	4,9	-	-	-	-
	Интерфейс коронки вариант 2					Интерфейс имплантата										
	Номенклатура	dZ1,	dZ2,	LZ1,	Вес,	D1,	D2,	A1,	L2,	A2,	A3,	d2,	l1,	l2,	H,	SO,
		мм	мм	мм	г	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
Основание титановое (тип 2) восьмигранное,	BZST148-SC/U	3,2	4,8	4	0,159	2,4	2	60	1	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZST248-SC/U	3,2	4,8	4	0,173	2,4	2	60	2	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZST348-SC/U	3,2	4,8	4	0,193	2,4	2	60	3	16	90	4,9	-	-	-	3,1

совместимо с STRAUMANN TISSUE LEVEL	BZST148-RC/U	3,2	4,8	3	0,153	2,4	2	60	1	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZST248-RC/U	3,2	4,8	3	0,167	2,4	2	60	2	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZST348-RC/U	3,2	4,8	3	0,187	2,4	2	60	3	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZST165-SC/U	3,3	5,2	4	0,164	2,4	2	60	1	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BZST265-SC/U	3,3	5,2	4	0,178	2,4	2	60	2	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BZST365-SC/U	3,3	5,2	4	0,198	2,4	2	60	3	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BZST165-RC/U	3,3	5,2	3	0,155	2,4	2	60	1	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BZST265-RC/U	3,3	5,2	3	0,169	2,4	2	60	2	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BZST365-RC/U	3,3	5,2	3	0,189	2,4	2	60	3	16	90	4,9	-	-	-	3,3
Основание титановое (тип 2), совместимо с STRAUMANN TISSUE LEVEL	BZST148-BC/U	3,2	4,8	4	0,156	2,4	2	60	1	16	90	4,9	-	-	-	-
	BZST248-BC/U	3,2	4,8	4	0,17	2,4	2	60	2	16	90	4,9	-	-	-	-
	BZST348-BC/U	3,2	4,8	4	0,19	2,4	2	60	3	16	90	4,9	-	-	-	-
	BZST165-BC/U	3,3	5,2	4	0,161	2,4	2	60	1	16	90	4,9	-	-	-	-
	BZST265-BC/U	3,3	5,2	4	0,175	2,4	2	60	2	16	90	4,9	-	-	-	-
	BZST365-BC/U	3,3	5,2	4	0,195	2,4	2	60	3	16	90	4,9	-	-	-	-

	Интерфейс коронки вариант 1					Интерфейс имплантата										
	Номенклатура	dG1 мм	dG2 мм	LG, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	I1, мм	I2, мм	H, мм	SO, мм
Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с NOBEL BIOCARE ACTIVE	BGNA135-SC/U	3,4	4	5,2	0,13	2,4	1,8	90	1	24	-	2,8	-	-	2,25	-
	BGNA235-SC/U	3,4	4	6	0,144	2,4	1,8	90	2	24	-	2,8	-	-	2,25	-
	BGNA335-SC/U	3,4	4	6	0,164	2,4	1,8	90	3	24	-	2,8	-	-	2,25	-
	BGNA135-FC/U	3,4	4	4	0,124	2,4	1,8	90	1	24	-	2,8	-	-	2,25	-
	BGNA235-FC/U	3,4	4	4	0,138	2,4	1,8	90	2	24	-	2,8	-	-	2,25	-
	BGNA335-FC/U	3,4	4	4	0,158	2,4	1,8	90	3	24	-	2,8	-	-	2,25	-
	BGNA143-SC/U	3,5	4,2	5,2	0,14	2,4	1,8	90	1	24	-	3,3	-	-	2,65	-
	BGNA243-SC/U	3,5	4,2	6	0,134	2,4	1,8	90	2	24	-	3,3	-	-	2,65	-
	BGNA343-SC/U	3,5	4,2	6	0,154	2,4	1,8	90	3	24	-	3,3	-	-	2,65	-
	BGNA143-FC/U	3,5	4,2	4	0,134	2,4	1,8	90	1	24	-	3,3	-	-	2,65	-
	BGNA243-FC/U	3,5	4,2	4	0,148	2,4	1,8	90	2	24	-	3,3	-	-	2,65	-
	BGNA343-FC/U	3,5	4,2	4	0,168	2,4	1,8	90	3	24	-	3,3	-	-	2,65	-
Основание титановое (тип 1), совместимо с NOBEL BIOCARE ACTIVE	BGNA135-BC/U	3,4	4	5,2	0,128	2,4	1,8	90	1	24	-	2,8	-	-	-	-
	BGNA235-BC/U	3,4	4	6	0,142	2,4	1,8	90	2	24	-	2,8	-	-	-	-
	BGNA335-BC/U	3,4	4	6	0,162	2,4	1,8	90	3	24	-	2,8	-	-	-	-
	BGNA143-BC/U	3,5	4,2	5,2	0,138	2,4	1,8	90	1	24	-	3,3	-	-	-	-
	BGNA243-BC/U	3,5	4,2	6	0,152	2,4	1,8	90	2	24	-	3,3	-	-	-	-
	BGNA343-BC/U	3,5	4,2	6	0,172	2,4	1,8	90	3	24	-	3,3	-	-	-	-
	Интерфейс коронки вариант 2					Интерфейс имплантата										
	Номенклатура	dZ1 мм	dZ2 мм	LZ1, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	I1, мм	I2, мм	H, мм	SO, мм
Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с NOBEL BIOCARE ACTIVE	BZNA135-SC/U	3,2	4,8	4	0,115	2,4	1,8	90	1	24	-	2,8	-	-	2,25	-
	BZNA235-SC/U	3,2	4,8	4	0,129	2,4	1,8	90	2	24	-	2,8	-	-	2,25	-
	BZNA335-SC/U	3,2	4,8	4	0,149	2,4	1,8	90	3	24	-	2,8	-	-	2,25	-
	BZNA135-FC/U	3,2	4,8	3	0,109	3,2	2,4	1,8	90	1	24	-	2,8	-	-	2,25
	BZNA235-FC/U	3,2	4,8	3	0,123	3,2	2,4	1,8	90	2	24	-	2,8	-	-	2,25
	BZNA335-FC/U	3,2	4,8	3	0,143	3,2	2,4	1,8	90	3	24	-	2,8	-	-	2,25
	BZNA143-SC/U	3,3	5,2	4	0,125	2,4	1,8	90	1	24	-	3,3	-	-	2,65	-
	BZNA243-SC/U	3,3	5,2	4	0,119	2,4	1,8	90	2	24	-	3,3	-	-	2,65	-
	BZNA343-SC/U	3,3	5,2	4	0,139	2,4	1,8	90	3	24	-	3,3	-	-	2,65	-
	BZNA143-FC/U	3,3	5,2	3	0,119	2,4	1,8	90	1	24	-	3,3	-	-	2,65	-
	BZNA243-FC/U	3,3	5,2	3	0,133	2,4	1,8	90	2	24	-	3,3	-	-	2,65	-
	BZNA343-FC/U	3,3	5,2	3	0,153	2,4	1,8	90	3	24	-	3,3	-	-	2,65	-
Основание титановое (тип 2), совместимо с	BZNA135-BC/U	3,2	4,8	4	0,113	2,4	1,8	90	1	24	-	2,8	-	-	-	-
	BZNA235-BC/U	3,2	4,8	4	0,127	2,4	1,8	90	2	24	-	2,8	-	-	-	-
	BZNA335-BC/U	3,2	4,8	4	0,147	2,4	1,8	90	3	24	-	2,8	-	-	-	-

NOBEL	BZNA143-BC/U	3,3	5,2	4	0,123	2,4	1,8	90	1	24	-	3,3	-	-	-	-
BIOCARE	BZNA243-BC/U	3,3	5,2	4	0,137	2,4	1,8	90	2	24	-	3,3	-	-	-	-
ACTIVE	BZNA343-BC/U	3,3	5,2	4	0,157	2,4	1,8	90	3	24	-	3,3	-	-	-	-

	Интерфейс коронки вариант 1					Интерфейс имплантата										
	Номенклатура	dG1 мм	dG2 мм	LG, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	I1, мм	I2, мм	H, мм	SO, мм
Основание титановое (тип 1) восьмигранное, совместимо с NOBEL BRANEMARK	BGNB135-SC/U	3,3	4	5,2	0,156	2,4	1,8	90	1	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGNB235-SC/U	3,3	4	6	0,17	2,4	1,8	90	2	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGNB335-SC/U	3,3	4	6	0,19	2,4	1,8	90	3	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGNB135-FC/U	3,3	4	4	0,15	2,4	1,8	90	1	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGNB235-FC/U	3,3	4	4	0,164	2,4	1,8	90	2	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGNB335-FC/U	3,3	4	4	0,184	2,4	1,8	90	3	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGNB141-SC/U	3,4	4,1	5,2	0,161	2,4	1,8	90	1	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGNB241-SC/U	3,4	4,1	6	0,175	2,4	1,8	90	2	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGNB341-SC/U	3,4	4,1	6	0,195	2,4	1,8	90	3	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGNB141-FC/U	3,4	4,1	4	0,155	2,4	1,8	90	1	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGNB241-FC/U	3,4	4,1	4	0,169	2,4	1,8	90	2	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGNB341-FC/U	3,4	4,1	4	0,189	2,4	1,8	90	3	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGNB151-SC/U	3,5	4,2	5,2	0,167	2,4	1,8	90	1	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGNB251-SC/U	3,5	4,2	6	0,181	2,4	1,8	90	2	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGNB351-SC/U	3,5	4,2	6	0,201	2,4	1,8	90	3	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGNB151-FC/U	3,5	4,2	4	0,161	2,4	1,8	90	1	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGNB251-FC/U	3,5	4,2	4	0,175	2,4	1,8	90	2	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGNB351-FC/U	3,5	4,2	4	0,195	2,4	1,8	90	3	16	90	4,9	-	-	-	3,1
Основание титановое (тип 1), совместимо с NOBEL BRANEMARK	BGNB135-BC/U	3,3	4	5,2	0,153	2,4	1,8	90	1	16	90	4,9	-	-	-	-
	BGNB235-BC/U	3,3	4	6	0,167	2,4	1,8	90	2	16	90	4,9	-	-	-	-
	BGNB335-BC/U	3,3	4	6	0,187	2,4	1,8	90	3	16	90	4,9	-	-	-	-
	BGNB141-BC/U	3,4	4,1	5,2	0,158	2,4	1,8	90	1	16	90	4,9	-	-	-	-
	BGNB241-BC/U	3,4	4,1	6	0,172	2,4	1,8	90	2	16	90	4,9	-	-	-	-
	BGNB341-BC/U	3,4	4,1	6	0,192	2,4	1,8	90	3	16	90	4,9	-	-	-	-
	BGNB151-BC/U	3,5	4,2	5,2	0,164	2,4	1,8	90	1	16	90	4,9	-	-	-	-
	BGNB251-BC/U	3,5	4,2	6	0,178	2,4	1,8	90	2	16	90	4,9	-	-	-	-
	BGNB351-BC/U	3,5	4,2	6	0,198	2,4	1,8	90	3	16	90	4,9	-	-	-	-
	Интерфейс коронки вариант 2					Интерфейс имплантата										
	Номенклатура	dZ1, мм	dZ2, мм	LZ1, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	I1, мм	I2, мм	H, мм	SO, мм
Основание титановое (тип 2) восьмигранное, совместимо с NOBEL BRANEMARK	BZNB135-SC/U	3,1	4,6	4	0,141	2,4	1,8	90	1	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZNB235-SC/U	3,1	4,6	4	0,155	2,4	1,8	90	2	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZNB335-SC/U	3,1	4,6	4	0,175	2,4	1,8	90	3	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZNB135-FC/U	3,1	4,6	3	0,135	2,4	1,8	90	1	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZNB235-FC/U	3,1	4,6	3	0,149	2,4	1,8	90	2	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZNB335-FC/U	3,1	4,6	3	0,169	2,4	1,8	90	3	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZNB141-SC/U	3,2	4,8	4	0,146	2,4	1,8	90	1	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZNB241-SC/U	3,2	4,8	4	0,16	2,4	1,8	90	2	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZNB341-SC/U	3,2	4,8	4	0,18	2,4	1,8	90	3	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZNB141-FC/U	3,2	4,8	3	0,14	2,4	1,8	90	1	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZNB241-FC/U	3,2	4,8	3	0,154	2,4	1,8	90	2	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZNB341-FC/U	3,2	4,8	3	0,174	2,4	1,8	90	3	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZNB151-SC/U	3,3	5,2	4	0,152	2,4	1,8	90	1	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZNB251-SC/U	3,3	5,2	4	0,166	2,4	1,8	90	2	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZNB351-SC/U	3,3	5,2	4	0,186	2,4	1,8	90	3	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZNB151-FC/U	3,3	5,2	3	0,146	2,4	1,8	90	1	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZNB251-FC/U	3,3	5,2	3	0,16	2,4	1,8	90	2	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZNB351-FC/U	3,3	5,2	3	0,18	2,4	1,8	90	3	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZNB135-BC/U	3,1	4,6	4	0,138	2,4	1,8	90	1	16	90	4,9	-	-	-	-

Основание титановое (тип 2), совместимо с NOBEL BRANEMARK	BZNB235-BC/U	3,1	4,6	4	0,152	2,4	1,8	90	2	16	90	4,9	-	-	-	-
	BZNB335-BC/U	3,1	4,6	4	0,172	2,4	1,8	90	3	16	90	4,9	-	-	-	-
	BZNB141-BC/U	3,2	4,8	4	0,143	2,4	1,8	90	1	16	90	4,9	-	-	-	-
	BZNB241-BC/U	3,2	4,8	4	0,157	2,4	1,8	90	2	16	90	4,9	-	-	-	-
	BZNB341-BC/U	3,2	4,8	4	0,177	2,4	1,8	90	3	16	90	4,9	-	-	-	-
	BZNB151-BC/U	3,3	5,2	4	0,149	2,4	1,8	90	1	16	90	4,9	-	-	-	-
	BZNB251-BC/U	3,3	5,2	4	0,163	2,4	1,8	90	2	16	90	4,9	-	-	-	-
	BZNB351-BC/U	3,3	5,2	4	0,183	2,4	1,8	90	3	16	90	4,9	-	-	-	-

	Интерфейс коронки вариант 1					Интерфейс имплантата											
	Номенклатура	dG1 мм	dG2 мм	LG, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	П, мм	Л2, мм	Н, мм	SO, мм	
Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с NOBEL REPLACE	BGNR135-SC/U	3,4	4	5,2	0,125	2,4	1,8	90	1	24	-	2,8	-	-	2,3	-	
	BGNR235-SC/U	3,4	4	6	0,14	2,4	1,8	90	2	24	-	2,8	-	-	2,3	-	
	BGNR335-SC/U	3,4	4	6	0,16	2,4	1,8	90	3	24	-	2,8	-	-	2,3	-	
	BGNR135-FC/U	3,4	4	4	0,119	2,4	1,8	90	1	24	-	2,8	-	-	2,3	-	
	BGNR235-FC/U	3,4	4	4	0,133	2,4	1,8	90	2	24	-	2,8	-	-	2,3	-	
	BGNR335-FC/U	3,4	4	4	0,153	2,4	1,8	90	3	24	-	2,8	-	-	2,3	-	
	BGNR143-SC/U	3,4	4,1	5,2	0,155	2,4	1,8	90	1	24	-	3,3	-	-	2,3	-	
	BGNR243-SC/U	3,4	4,1	6	0,169	2,4	1,8	90	2	24	-	3,3	-	-	2,3	-	
	BGNR343-SC/U	3,4	4,1	6	0,189	2,4	1,8	90	3	24	-	3,3	-	-	2,3	-	
	BGNR143-FC/U	3,4	4,1	4	0,149	2,4	1,8	90	1	24	-	3,3	-	-	2,6	-	
	BGNR243-FC/U	3,4	4,1	4	0,163	2,4	1,8	90	2	24	-	3,3	-	-	2,6	-	
	BGNR343-FC/U	3,4	4,1	4	0,183	2,4	1,8	90	3	24	-	3,3	-	-	2,6	-	
	BGNR150-SC/U	3,5	4,2	5,2	0,253	2,4	1,8	90	1	24	-	3,8	-	-	2,6	-	
	BGNR250-SC/U	3,5	4,2	6	0,393	2,4	1,8	90	2	24	-	3,8	-	-	2,6	-	
	BGNR350-SC/U	3,5	4,2	6	0,413	2,4	1,8	90	3	24	-	3,8	-	-	2,6	-	
	BGNR150-FC/U	3,5	4,2	4	0,247	2,4	1,8	90	1	24	-	3,8	-	-	2,6	-	
	BGNR250-FC/U	3,5	4,2	4	0,387	2,4	1,8	90	2	24	-	3,8	-	-	2,6	-	
	BGNR350-FC/U	3,5	4,2	4	0,407	2,4	1,8	90	3	24	-	3,8	-	-	2,6	-	
Основание титановое (тип 1), совместимо с NOBEL REPLACE	BGNR135-BC/U	3,4	4	5,2	0,123	2,4	1,8	90	1	24	-	2,8	-	-	-	-	
	BGNR235-BC/U	3,4	4	6	0,138	2,4	1,8	90	2	24	-	2,8	-	-	-	-	
	BGNR335-BC/U	3,4	4	6	0,158	2,4	1,8	90	3	24	-	2,8	-	-	-	-	
	BGNR143-BC/U	3,4	4,1	5,2	0,153	2,4	1,8	90	1	24	-	3,3	-	-	-	-	
	BGNR243-BC/U	3,4	4,1	6	0,167	2,4	1,8	90	2	24	-	3,3	-	-	-	-	
	BGNR343-BC/U	3,4	4,1	6	0,187	2,4	1,8	90	3	24	-	3,3	-	-	-	-	
	BGNR150-BC/U	3,5	4,2	5,2	0,251	2,4	1,8	90	1	24	-	3,8	-	-	-	-	
	BGNR250-BC/U	3,5	4,2	6	0,391	2,4	1,8	90	2	24	-	3,8	-	-	-	-	
BGNR350-BC/U	3,5	4,2	6	0,411	2,4	1,8	90	3	24	-	3,8	-	-	-	-		
	Интерфейс коронки вариант 2					Интерфейс имплантата											
	Номенклатура	dZ1 мм	dZ2 мм	LZ1, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	П, мм	Л2, мм	Н, мм	SO, мм	
Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с NOBEL REPLACE	BZNR135-SC/U	3,1	4,6	4	0,11	2,4	1,8	90	1	24	-	2,8	-	-	2,3	-	
	BZNR235-SC/U	3,1	4,6	4	0,125	2,4	1,8	90	2	24	-	2,8	-	-	2,3	-	
	BZNR335-SC/U	3,1	4,6	4	0,145	2,4	1,8	90	3	24	-	2,8	-	-	2,3	-	
	BZNR135-FC/U	3,1	4,6	3	0,104	2,4	1,8	90	1	24	-	2,8	-	-	2,3	-	
	BZNR235-FC/U	3,1	4,6	3	0,118	2,4	1,8	90	2	24	-	2,8	-	-	2,3	-	
	BZNR335-FC/U	3,1	4,6	3	0,138	2,4	1,8	90	3	24	-	2,8	-	-	2,3	-	
	BZNR143-SC/U	3,2	4,8	4	0,14	2,4	1,8	90	1	24	-	3,3	-	-	2,3	-	
	BZNR243-SC/U	3,2	4,8	4	0,154	2,4	1,8	90	2	24	-	3,3	-	-	2,3	-	
	BZNR343-SC/U	3,2	4,8	4	0,174	2,4	1,8	90	3	24	-	3,3	-	-	2,3	-	
	BZNR143-FC/U	3,2	4,8	3	0,134	2,4	1,8	90	1	24	-	3,3	-	-	2,6	-	
	BZNR243-FC/U	3,2	4,8	3	0,148	2,4	1,8	90	2	24	-	3,3	-	-	2,6	-	
	BZNR343-FC/U	3,2	4,8	3	0,168	2,4	1,8	90	3	24	-	3,3	-	-	2,6	-	
	BZNR150-SC/U	3,3	5,2	4	0,238	2,4	1,8	90	1	24	-	3,8	-	-	2,6	-	
	BZNR250-SC/U	3,3	5,2	4	0,378	2,4	1,8	90	2	24	-	3,8	-	-	2,6	-	

Основание титановое (тип 2), совместимо с NOBEL REPLACE	BZNR350-SC/U	3,3	5,2	4	0,398	2,4	1,8	90	3	24	-	3,8	-	-	2,6	-
	BZNR150-FC/U	3,3	5,2	3	0,232	2,4	1,8	90	1	24	-	3,8	-	-	2,6	-
	BZNR250-FC/U	3,3	5,2	3	0,372	2,4	1,8	90	2	24	-	3,8	-	-	2,6	-
	BZNR350-FC/U	3,3	5,2	3	0,392	2,4	1,8	90	3	24	-	3,8	-	-	2,6	-
	BZNR135-BC/U	3,1	4,6	4	0,108	2,4	1,8	90	1	24	-	2,8	-	-	-	-
	BZNR235-BC/U	3,1	4,6	4	0,123	2,4	1,8	90	2	24	-	2,8	-	-	-	-
	BZNR335-BC/U	3,1	4,6	4	0,143	2,4	1,8	90	3	24	-	2,8	-	-	-	-
	BZNR143-BC/U	3,2	4,8	4	0,138	2,4	1,8	90	1	24	-	3,3	-	-	-	-
	BZNR243-BC/U	3,2	4,8	4	0,152	2,4	1,8	90	2	24	-	3,3	-	-	-	-
	BZNR343-BC/U	3,2	4,8	4	0,172	2,4	1,8	90	3	24	-	3,3	-	-	-	-
	BZNR150-BC/U	3,3	5,2	4	0,236	2,4	1,8	90	1	24	-	3,8	-	-	-	-
	BZNR250-BC/U	3,3	5,2	4	0,376	2,4	1,8	90	2	24	-	3,8	-	-	-	-
	BZNR350-BC/U	3,3	5,2	4	0,396	2,4	1,8	90	3	24	-	3,8	-	-	-	-

	Интерфейс коронки вариант 1					Интерфейс имплантата										
	Номенклатура	dG1 мм	dG2 мм	LG, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	I1, мм	I2, мм	H, мм	SO, мм
Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с DENTSPLY XIVE	BGXF130-SC/U	3,3	4	5,2	0,132	2,3	1,6	180	1	16	90	2,8	-	-	2,2	-
	BGXF130-FC/U	3,3	4	4	0,126	2,3	1,6	180	1	16	90	2,8	-	-	2,2	-
	BGXF134-SC/U	3,4	4	5,2	0,138	2,3	1,6	180	1,8	16	90	2,8	-	-	2,5	-
	BGXF134-FC/U	3,4	4	4	0,132	2,4	1,8	180	1,8	16	90	3,3	-	-	2,5	-
	BGXF138-SC/U	3,4	4,1	5,2	0,144	2,4	1,8	180	1,8	16	90	3,3	-	-	2,5	-
	BGXF138-FC/U	3,4	4,1	4	0,137	2,4	2	180	2,3	16	90	3,3	-	-	2,5	-
	BGXF145-SC/U	3,5	4,2	6	0,15	2,4	2	180	2,3	16	90	3,3	-	-	2,5	-
	BGXF145-FC/U	3,5	4,2	4	0,145	2,4	2	180	3	16	90	3,8	-	-	2,6	-
	BGXF155-SC/U	3,5	4,4	6	0,162	2,4	2	180	3	16	90	3,8	-	-	2,6	-
	BGXF155-FC/U	3,5	4,4	4	0,156	2,4	2	180	3	16	90	3,8	-	-	2,6	-
Основание титановое (тип 1), совместимо с DENTSPLY XIVE	BGXF130-BC/U	3,3	4	5,2	0,129	2,3	1,6	180	1	16	90	2,8	-	-	-	-
	BGXF134-BC/U	3,4	4	5,2	0,135	2,4	1,8	180	1,8	16	90	3,3	-	-	-	-
	BGXF138-BC/U	3,4	4,1	5,2	0,141	2,4	2	180	2,3	16	90	3,3	-	-	-	-
	BGXF145-BC/U	3,5	4,2	6	0,147	2,4	2	180	2,3	16	90	3,3	-	-	-	-
	BGXF155-BC/U	3,5	4,4	6	0,159	2,4	2	180	3	16	90	3,8	-	-	-	-
	Интерфейс коронки вариант 2					Интерфейс имплантата										
	Номенклатура	dZ1 мм	dZ2 мм	LZ1, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	I1, мм	I2, мм	H, мм	SO, мм
Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с DENTSPLY XIVE	BZXF130-SC/U	3,1	4,6	4	0,12	2,3	1,6	180	1	16	90	2,8	-	-	2,2	-
	BZXF130-FC/U	3,1	4,6	3	0,114	2,3	1,6	180	1	16	90	2,8	-	-	2,2	-
	BZXF134-SC/U	3,1	4,6	4	0,126	2,3	1,6	180	1,8	16	90	2,8	-	-	2,5	-
	BZXF134-FC/U	3,1	4,6	3	0,12	2,4	1,8	180	1,8	16	90	3,3	-	-	2,5	-
	BZXF138-SC/U	3,2	4,8	4	0,132	2,4	1,8	180	1,8	16	90	3,3	-	-	2,5	-
	BZXF138-FC/U	3,2	4,8	3	0,125	2,4	2	180	2,3	16	90	3,3	-	-	2,5	-
	BZXF145-SC/U	3,2	4,8	4	0,138	2,4	2	180	2,3	16	90	3,3	-	-	2,5	-
	BZXF145-FC/U	3,2	4,8	3	0,133	2,4	2	180	3	16	90	3,8	-	-	2,6	-
	BZXF155-SC/U	3,3	5,2	4	0,15	2,4	2	180	3	16	90	3,8	-	-	2,6	-
Основание титановое (тип 2), совместимо с DENTSPLY XIVE	BZXF155-FC/U	3,3	5,2	3	0,144	2,4	2	180	3	16	90	3,8	-	-	2,6	-
	BZXF130-BC/U	3,1	4,6	4	0,117	2,3	1,6	180	1	16	90	2,8	-	-	-	-
	BZXF134-BC/U	3,1	4,6	4	0,123	2,4	1,8	180	1,8	16	90	3,3	-	-	-	-
	BZXF138-BC/U	3,2	4,8	4	0,129	2,4	2	180	2,3	16	90	3,3	-	-	-	-
	BZXF145-BC/U	3,2	4,8	4	0,135	2,4	2	180	2,3	16	90	3,3	-	-	-	-
	BZXF155-BC/U	3,3	5,2	4	0,147	2,4	2	180	3	16	90	3,8	-	-	-	-

	Интерфейс коронки вариант 1					Интерфейс имплантата										
	Номенклатура	dG1 мм	dG2 мм	LG, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	I1, мм	I2, мм	H, мм	SO, мм
	BGYA135-SC/U	3,4	4,1	5,2	0,152	2,3	1,6	60	1,3	22	-	2,8	2,2	0,7	-	-

Основание титановое (тип 1), совместимо с DENTSPLY ANKYLOS	BGYA135-BC/U	3,4	4,1	5,2	0,149	2,3	1,6	60	1,3	22	-	2,8	-	-	-	-
	BGYA145-SC/U	3,5	4,2	5,2	0,155	2,4	2	60	1,6	22	-	3,3	2,4	1	-	-
	BGYA145-BC/U	3,5	4,2	5,2	0,152	2,4	2	60	1,6	22	-	3,3	-	-	-	-
	BGYA155-SC/U	3,5	4,4	6	0,162	2,4	2	60	2	22	-	3,3	2,4	1	-	-
	BGYA155-BC/U	3,5	4,4	6	0,159	2,4	2	60	2	22	-	3,3	-	-	-	-
Интерфейс коронки вариант 2						Интерфейс имплантата										
	Номенклатура	dZ1, мм	dZ2, мм	LZ1, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	I1, мм	I2, мм	H, мм	SO, мм
Основание титановое (тип 2), совместимо с DENTSPLY ANKYLOS	BZYA135-SC/U	3,1	4,6	4	0,142	2,3	1,6	60	1,3	22	-	2,8	2,2	0,7	-	-
	BZYA135-BC/U	3,1	4,6	4	0,139	2,3	1,6	60	1,3	22	-	2,8	-	-	-	-
	BZYA145-SC/U	3,2	4,8	4	0,145	2,4	2	60	1,6	22	-	3,3	2,4	1	-	-
	BZYA145-BC/U	3,2	4,8	4	0,142	2,4	2	60	1,6	22	-	3,3	-	-	-	-
	BZYA155-SC/U	3,3	5,2	4	0,152	2,4	2	60	2	22	-	3,3	2,4	1	-	-
	BZYA155-BC/U	3,3	5,2	4	0,149	2,4	2	60	2	22	-	3,3	-	-	-	-

Интерфейс коронки вариант 1						Интерфейс имплантата										
	Номенклатура	dG1, мм	dG2, мм	LG, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	I1, мм	I2, мм	H, мм	SO, мм
Основание титановое (тип 1) восьмигранное, совместимо с BIOMET 3I CERTAIN	BGBC134-SC/U	3,3	4,1	5,2	0,142	2,3	1,6	180	1	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGBC134-FC/U	3,3	4,1	4	0,136	2,3	1,6	180	1	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGBC141-SC/U	3,4	4,2	5,2	0,148	2,3	1,6	180	1	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGBC141-FC/U	3,4	4,2	4	0,142	2,3	1,6	180	1,6	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGBC150-SC/U	3,5	4,2	5,2	0,151	2,4	2	180	1,6	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGBC150-FC/U	3,5	4,2	4	0,145	2,4	2	180	2	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BGBC160-SC/U	3,5	4,4	6	0,157	2,4	2	180	2	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BGBC160-FC/U	3,5	4,4	4	0,151	2,4	2	180	2	16	90	4,9	-	-	-	3,3
Основание титановое (тип 1), совместимо с BIOMET 3I CERTAIN	BGBC134-BC/U	3,3	4,1	5,2	0,14	2,3	1,6	180	1	16	90	4,9	-	-	-	-
	BGBC141-BC/U	3,4	4,2	5,2	0,146	2,3	1,6	180	1,6	16	90	4,9	-	-	-	-
	BGBC150-BC/U	3,5	4,2	5,2	0,149	2,4	2	180	1,6	16	90	4,9	-	-	-	-
	BGBC160-BC/U	3,5	4,4	6	0,155	2,4	2	180	2	16	90	4,9	-	-	-	-
Интерфейс коронки вариант 2						Интерфейс имплантата										
	Номенклатура	dZ1, мм	dZ2, мм	LZ1, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	I1, мм	I2, мм	H, мм	SO, мм
Основание титановое (тип 2) восьмигранное, совместимо с BIOMET 3I CERTAIN	BZBC134-SC/U	3,1	4,6	4	0,129	2,3	1,6	180	1	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZBC134-FC/U	3,1	4,6	3	0,123	2,3	1,6	180	1	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZBC141-SC/U	3,2	4,8	4	0,135	2,3	1,6	180	1	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZBC141-FC/U	3,2	4,8	3	0,129	2,3	1,6	180	1,6	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZBC150-SC/U	3,3	4,8	4	0,138	2,4	2	180	1,6	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZBC150-FC/U	3,3	4,8	3	0,132	2,4	2	180	2	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BZBC160-SC/U	3,3	5,2	4	0,144	2,4	2	180	2	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BZBC160-FC/U	3,3	5,2	3	0,138	2,4	2	180	2	16	90	4,9	-	-	-	3,3
Основание титановое (тип 2), совместимо с BIOMET 3I CERTAIN	BZBC134-BC/U	3,1	4,6	4	0,127	2,3	1,6	180	1	16	90	4,9	-	-	-	-
	BZBC141-BC/U	3,2	4,8	4	0,133	2,3	1,6	180	1,6	16	90	4,9	-	-	-	-
	BZBC150-BC/U	3,3	4,8	4	0,136	2,4	2	180	1,6	16	90	4,9	-	-	-	-
	BZBC160-BC/U	3,3	5,2	4	0,142	2,4	2	180	2	16	90	4,9	-	-	-	-

Интерфейс коронки вариант 1						Интерфейс имплантата										
	Номенклатура	dG1, мм	dG2, мм	LG, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	I1, мм	I2, мм	H, мм	SO, мм
Основание титановое (тип 1) восьмигранное, совместимо с	BGBO134-SC/U	3,3	4,1	5,2	0,112	2,3	1,6	180	1,3	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGBO134-FC/U	3,3	4,1	4	0,108	2,3	1,6	180	1,3	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGBO141-SC/U	3,4	4,2	5,2	0,113	2,3	1,6	180	1,4	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGBO141-FC/U	3,4	4,2	4	0,111	2,3	1,6	180	1,4	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGBO150-SC/U	3,5	4,2	5,2	0,115	2,4	2	180	1,5	16	90	4,9	-	-	-	3,3

BIOMET 3I OSSEOTITE	BGBO150-FC/U	3,5	4,2	4	0,125	2,4	2	180	1,5	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BGBO160-SC/U	3,5	4,4	6	0,13	2,4	2	180	1,6	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BGBO160-FC/U	3,5	4,4	4	0,124	2,4	2	180	1,6	16	90	4,9	-	-	-	3,3
Основание титановое (тип 1), совместимо с BIOMET 3I OSSEOTITE	BGBO134-BC/U	3,3	4,1	5,2	0,11	2,3	1,6	180	1,3	16	90	4,9	-	-	-	-
	BGBO141-BC/U	3,4	4,2	5,2	0,111	2,3	1,6	180	1,4	16	90	4,9	-	-	-	-
	BGBO150-BC/U	3,5	4,2	5,2	0,113	2,4	2	180	1,5	16	90	4,9	-	-	-	-
	BGBO160-BC/U	3,5	4,4	6	0,127	2,4	2	180	1,6	16	90	4,9	-	-	-	-
Интерфейс коронки вариант 2						Интерфейс имплантата										
Основание титановое (тип 2) восьмигранное, совместимо с BIOMET 3I OSSEOTITE	Номенклатура	dZ1, мм	dZ2, мм	LZ1, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	I1, мм	I2, мм	H, мм	SO, мм
	BZBO134-SC/U	3,1	4,6	4	0,102	2,3	1,6	180	1,3	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZBO134-FC/U	3,1	4,6	3	0,098	2,3	1,6	180	1,3	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZBO141-SC/U	3,2	4,8	4	0,103	2,3	1,6	180	1,4	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZBO141-FC/U	3,2	4,8	3	0,101	2,3	1,6	180	1,4	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZBO150-SC/U	3,3	4,8	4	0,105	2,4	2	180	1,5	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BZBO150-FC/U	3,3	4,8	3	0,115	2,4	2	180	1,5	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BZBO160-SC/U	3,3	5,2	4	0,12	2,4	2	180	1,6	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BZBO160-FC/U	3,3	5,2	3	0,114	2,4	2	180	1,6	16	90	4,9	-	-	-	3,3
Основание титановое (тип 2), совместимо с BIOMET 3I OSSEOTITE	BZBO134-BC/U	3,1	4,6	4	0,1	2,3	1,6	180	1,3	16	90	4,9	-	-	-	-
	BZBO141-BC/U	3,2	4,8	4	0,101	2,3	1,6	180	1,4	16	90	4,9	-	-	-	-
	BZBO150-BC/U	3,3	4,8	4	0,103	2,4	2	180	1,5	16	90	4,9	-	-	-	-
	BZBO160-BC/U	3,3	5,2	4	0,117	2,4	2	180	1,6	16	90	4,9	-	-	-	-

Основание титановое (тип 1) восьмигранное, совместимо с ZIMMER	Интерфейс коронки вариант 1					Интерфейс имплантата										
	Номенклатура	dG1, мм	dG2, мм	LG, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	I1, мм	I2, мм	H, мм	SO, мм
	BGZI130-FC/U	3,3	4,1	4	0,078	2,3	1,6	180	1,3	16	90	4,9	-	-	-	3
	BGZI135-SC/U	3,4	4,2	5,2	0,095	2,3	1,6	180	1,3	16	90	4,9	-	-	-	3
	BGZI135-FC/U	3,4	4,2	4	0,089	2,3	1,6	180	1,3	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGZI145-SC/U	3,5	4,2	5,2	0,156	2,4	1,8	180	1,5	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BGZI145-FC/U	3,5	4,2	4	0,15	2,4	1,8	180	1,5	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BGZI157-SC/U	3,5	4,4	6	0,188	2,4	2	180	1,6	16	90	4,9	-	-	-	3,3
Основание титановое (тип 1), совместимо с ZIMMER	BGZI157-FC/U	3,5	4,4	4	0,182	2,4	2	180	1,6	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BGZI135-BC/U	3,4	4,2	5,2	0,092	2,3	1,6	180	1,3	16	90	4,9	-	-	-	-
	BGZI145-BC/U	3,5	4,2	5,2	0,153	2,4	1,8	180	1,5	16	90	4,9	-	-	-	-
Основание титановое (тип 2) восьмигранное, совместимо с ZIMMER	BGZI157-BC/U	3,5	4,4	6	0,185	2,4	2	180	1,6	16	90	4,9	-	-	-	-
	Интерфейс коронки вариант 2					Интерфейс имплантата										
	Номенклатура	dZ1, мм	dZ2, мм	LZ1, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	I1, мм	I2, мм	H, мм	SO, мм
	BZZI130-FC/U	3,1	4,6	3	0,063	2,3	1,6	180	1,3	16	90	4,9	-	-	-	3
	BZZI135-SC/U	3,2	4,8	4	0,08	2,3	1,6	180	1,3	16	90	4,9	-	-	-	3
	BZZI135-FC/U	3,2	4,8	3	0,074	2,3	1,6	180	1,3	16	90	4,9	-	-	-	3,1
	BZZI145-SC/U	3,3	4,8	4	0,141	2,4	1,8	180	1,5	16	90	4,9	-	-	-	3,1
Основание титановое (тип 2), совместимо с ZIMMER	BZZI145-FC/U	3,3	4,8	3	0,135	2,4	1,8	180	1,5	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BZZI157-SC/U	3,3	5,2	4	0,173	2,4	2	180	1,6	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BZZI157-FC/U	3,3	5,2	3	0,167	2,4	2	180	1,6	16	90	4,9	-	-	-	3,3
	BZZI135-BC/U	3,2	4,8	4	0,077	2,3	1,6	180	1,3	16	90	4,9	-	-	-	-
	BZZI145-BC/U	3,3	4,8	4	0,138	2,4	1,8	180	1,5	16	90	4,9	-	-	-	-
Основание титановое (тип 2), совместимо с ZIMMER	BZZI157-BC/U	3,3	5,2	4	0,17	2,4	2	180	1,6	16	90	4,9	-	-	-	-

	Интерфейс коронки вариант 1					Интерфейс имплантата											
	Номенклатура	dG1, мм	dG2, мм	LG, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	l1, мм	l2, мм	H, мм	SO, мм	
Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с ASTRA TECH OSSEOSPEED	BGAO130-SC/U	3,3	4,1	5,2	0,124	2,3	1,6	180	1,3	22	-	2,5	-	-	2	-	
	BGAO230-SC/U	3,3	4,1	6	0,138	2,3	1,6	180	2	22	-	2,5	-	-	2	-	
	BGAO330-SC/U	3,3	4,1	6	0,158	2,3	1,6	180	3	22	-	2,5	-	-	2	-	
	BGAO130-FC/U	3,3	4,1	4	0,118	2,3	1,6	180	1,3	22	-	2,5	-	-	2	-	
	BGAO230-FC/U	3,3	4,1	4	0,132	2,3	1,6	180	2	22	-	2,5	-	-	2	-	
	BGAO330-FC/U	3,3	4,1	4	0,152	2,3	1,6	180	3	22	-	2,5	-	-	2	-	
	BGAO135-SC/U	3,4	4,2	5,2	0,138	2,3	1,6	180	1,3	22	-	2,8	-	-	2,1	-	
	BGAO235-SC/U	3,4	4,2	6	0,152	2,3	1,6	180	2	22	-	2,8	-	-	2,1	-	
	BGAO335-SC/U	3,4	4,2	6	0,172	2,3	1,6	180	3	22	-	2,8	-	-	2,1	-	
	BGAO135-FC/U	3,4	4,2	4	0,132	2,3	1,6	180	1,3	22	-	2,8	-	-	2,1	-	
	BGAO235-FC/U	3,4	4,2	4	0,146	2,3	1,6	180	2	22	-	2,8	-	-	2,1	-	
	BGAO335-FC/U	3,4	4,2	4	0,166	2,3	1,6	180	3	22	-	2,8	-	-	2,1	-	
	BGAO145-SC/U	3,5	4,4	5,2	0,187	2,4	2	180	1,3	22	-	3,3	-	-	2,5	-	
	BGAO245-SC/U	3,5	4,4	6	0,201	2,4	2	180	2	22	-	3,3	-	-	2,5	-	
	BGAO345-SC/U	3,5	4,4	6	0,221	2,4	2	180	3	22	-	3,3	-	-	2,5	-	
	BGAO145-FC/U	3,5	4,4	4	0,181	2,4	2	180	1,3	22	-	3,3	-	-	2,5	-	
	BGAO245-FC/U	3,5	4,4	4	0,195	2,4	2	180	2	22	-	3,3	-	-	2,5	-	
	BGAO345-FC/U	3,5	4,4	4	0,215	2,4	2	180	3	22	-	3,3	-	-	2,5	-	
Основание титановое (тип 1), совместимо с ASTRA TECH OSSEOSPEED	BGAO135-BC/U	3,4	4,2	5,2	0,136	2,3	1,6	180	1,3	22	-	2,8	-	-	-	-	
	BGAO235-BC/U	3,4	4,2	6	0,15	2,3	1,6	180	2	22	-	2,8	-	-	-	-	
	BGAO335-BC/U	3,4	4,2	6	0,17	2,3	1,6	180	3	22	-	2,8	-	-	-	-	
	BGAO145-BC/U	3,5	4,4	5,2	0,185	2,4	2	180	1,3	22	-	3,3	-	-	-	-	
	BGAO245-BC/U	3,5	4,4	6	0,199	2,4	2	180	2	22	-	3,3	-	-	-	-	
	BGAO345-BC/U	3,5	4,4	6	0,219	2,4	2	180	3	22	-	3,3	-	-	-	-	
	Интерфейс коронки вариант 2					Интерфейс имплантата											
	Номенклатура	dZ1, мм	dZ2, мм	LZ1, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	l1, мм	l2, мм	H, мм	SO, мм	
Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с ASTRA TECH OSSEOSPEED	BZAO130-SC/U	3,1	4,6	4	0,109	2,3	1,6	180	1,3	22	-	2,5	-	-	2	-	
	BZAO230-SC/U	3,1	4,6	4	0,123	2,3	1,6	180	2	22	-	2,5	-	-	2	-	
	BZAO330-SC/U	3,1	4,6	4	0,143	2,3	1,6	180	3	22	-	2,5	-	-	2	-	
	BZAO130-FC/U	3,1	4,6	3	0,103	2,3	1,6	180	1,3	22	-	2,5	-	-	2	-	
	BZAO230-FC/U	3,1	4,6	3	0,117	2,3	1,6	180	2	22	-	2,5	-	-	2	-	
	BZAO330-FC/U	3,1	4,6	3	0,137	2,3	1,6	180	3	22	-	2,5	-	-	2	-	
	BZAO135-SC/U	3,2	4,8	4	0,123	2,3	1,6	180	1,3	22	-	2,8	-	-	2,1	-	
	BZAO235-SC/U	3,2	4,8	4	0,137	2,3	1,6	180	2	22	-	2,8	-	-	2,1	-	
	BZAO335-SC/U	3,2	4,8	4	0,157	2,3	1,6	180	3	22	-	2,8	-	-	2,1	-	
	BZAO135-FC/U	3,2	4,8	3	0,117	2,3	1,6	180	1,3	22	-	2,8	-	-	2,1	-	
	BZAO235-FC/U	3,2	4,8	3	0,131	2,3	1,6	180	2	22	-	2,8	-	-	2,1	-	
	BZAO335-FC/U	3,2	4,8	3	0,151	2,3	1,6	180	3	22	-	2,8	-	-	2,1	-	
	BZAO145-SC/U	3,3	5,2	4	0,172	2,4	2	180	1,3	22	-	3,3	-	-	2,5	-	
	BZAO245-SC/U	3,3	5,2	4	0,186	2,4	2	180	2	22	-	3,3	-	-	2,5	-	
	BZAO345-SC/U	3,3	5,2	4	0,206	2,4	2	180	3	22	-	3,3	-	-	2,5	-	
	BZAO145-FC/U	3,3	5,2	3	0,166	2,4	2	180	1,3	22	-	3,3	-	-	2,5	-	
	BZAO245-FC/U	3,3	5,2	3	0,18	2,4	2	180	2	22	-	3,3	-	-	2,5	-	
	BZAO345-FC/U	3,3	5,2	3	0,2	2,4	2	180	3	22	-	3,3	-	-	2,5	-	
Основание титановое (тип 2), совместимо с ASTRA TECH OSSEOSPEED	BZAO135-BC/U	3,2	4,8	4	0,121	2,3	1,6	180	1,3	22	-	2,8	-	-	-	-	
	BZAO235-BC/U	3,2	4,8	4	0,135	2,3	1,6	180	2	22	-	2,8	-	-	-	-	
	BZAO335-BC/U	3,2	4,8	4	0,155	2,3	1,6	180	3	22	-	2,8	-	-	-	-	
	BZAO145-BC/U	3,3	5,2	4	0,17	2,4	2	180	1,3	22	-	3,3	-	-	-	-	
	BZAO245-BC/U	3,3	5,2	4	0,184	2,4	2	180	2	22	-	3,3	-	-	-	-	
	BZAO345-BC/U	3,3	5,2	4	0,204	2,4	2	180	3	22	-	3,3	-	-	-	-	

	Интерфейс коронки вариант 1					Интерфейс имплантата											
	Номенклатура	dG1 мм	dG2 мм	LG, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	l1, мм	l2, мм	H, мм	SO, мм	
Основание титановое (тип 1), совместимо с ASTRA EV SYSTEM	BGAE130-SC/U	3,3	4	5,2	0,127	2,3	1,6	180	1,3	22	-	2,8	2,2	0,7	-	-	
	BGAE230-SC/U	3,3	4	6	0,141	2,3	1,6	180	2	22	-	2,8	2,2	0,7	-	-	
	BGAE330-SC/U	3,3	4	6	0,161	2,3	1,6	180	3	22	-	2,8	2,2	0,7	-	-	
	BGAE130-BC/U	3,3	4	5,2	0,124	2,3	1,6	180	1,3	22	-	2,8	-	-	-	-	
	BGAE230-BC/U	3,3	4	6	0,138	2,3	1,6	180	2	22	-	2,8	-	-	-	-	
	BGAE330-BC/U	3,3	4	6	0,158	2,3	1,6	180	3	22	-	2,8	-	-	-	-	
	BGAE136-SC/U	3,4	4,1	5,2	0,131	2,3	1,6	180	1,3	22	-	2,8	2,2	0,7	-	-	
	BGAE236-SC/U	3,4	4,1	6	0,145	2,3	1,6	180	2	22	-	2,8	2,2	0,7	-	-	
	BGAE336-SC/U	3,4	4,1	6	0,165	2,3	1,6	180	3	22	-	2,8	2,2	0,7	-	-	
	BGAE136-BC/U	3,4	4,1	5,2	0,128	2,3	1,6	180	1,3	22	-	2,8	-	-	-	-	
	BGAE236-BC/U	3,4	4,1	6	0,142	2,3	1,6	180	2	22	-	2,8	-	-	-	-	
	BGAE336-BC/U	3,4	4,1	6	0,162	2,3	1,6	180	3	22	-	2,8	-	-	-	-	
	BGAE142-SC/U	3,4	4,2	5,2	0,136	2,3	1,6	180	1,3	22	-	3,3	2,4	1	-	-	
	BGAE242-SC/U	3,4	4,2	6	0,15	2,3	1,6	180	2	22	-	3,3	2,4	1	-	-	
	BGAE342-SC/U	3,4	4,2	6	0,17	2,3	1,6	180	3	22	-	3,3	2,4	1	-	-	
	BGAE142-BC/U	3,4	4,2	5,2	0,133	2,3	1,6	180	1,3	22	-	3,3	-	-	-	-	
	BGAE242-BC/U	3,4	4,2	6	0,147	2,3	1,6	180	2	22	-	3,3	-	-	-	-	
	BGAE342-BC/U	3,4	4,2	6	0,167	2,3	1,6	180	3	22	-	3,3	-	-	-	-	
	BGAE148-SC/U	3,5	4,3	5,2	0,14	2,4	2	180	1,3	22	-	3,3	2,4	1	-	-	
	BGAE248-SC/U	3,5	4,3	6	0,154	2,4	2	180	2	22	-	3,3	2,4	1	-	-	
	BGAE348-SC/U	3,5	4,3	6	0,174	2,4	2	180	3	22	-	3,3	2,4	1	-	-	
	BGAE148-BC/U	3,5	4,3	5,2	0,138	2,4	2	180	1,3	22	-	3,3	-	-	-	-	
	BGAE248-BC/U	3,5	4,3	6	0,152	2,4	2	180	2	22	-	3,3	-	-	-	-	
	BGAE348-BC/U	3,5	4,3	6	0,172	2,4	2	180	3	22	-	3,3	-	-	-	-	
	BGAE154-SC/U	3,5	4,4	5,2	0,144	2,4	2	180	1,3	22	-	3,3	2,4	1	-	-	
	BGAE254-SC/U	3,5	4,4	6	0,158	2,4	2	180	2	22	-	3,3	2,4	1	-	-	
	BGAE354-SC/U	3,5	4,4	6	0,178	2,4	2	180	3	22	-	3,3	2,4	1	-	-	
	BGAE154-BC/U	3,5	4,4	5,2	0,141	2,4	2	180	1,3	22	-	3,3	-	-	-	-	
	BGAE254-BC/U	3,5	4,4	6	0,155	2,4	2	180	2	22	-	3,3	-	-	-	-	
	BGAE354-BC/U	3,5	4,4	6	0,175	2,4	2	180	3	22	-	3,3	-	-	-	-	
Интерфейс коронки вариант 2					Интерфейс имплантата												
	Номенклатура	dZ1	dZ2	LZ1	Вес	D1	D2	A1	L2	A2	A3	d2	l1	l2	H	SO	
		мм	мм	мм	г	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	
Основание титановое (тип 2), совместимо с ASTRA EV SYSTEM	BZAE130-SC/U	3,1	4,6	4	0,112	2,3	1,6	180	1,3	22	-	2,8	2,2	0,7	-	-	
	BZAE230-SC/U	3,1	4,6	4	0,126	2,3	1,6	180	2	22	-	2,8	2,2	0,7	-	-	
	BZAE330-SC/U	3,1	4,6	4	0,146	2,3	1,6	180	3	22	-	2,8	2,2	0,7	-	-	
	BZAE130-BC/U	3,1	4,6	4	0,109	2,3	1,6	180	1,3	22	-	2,8	-	-	-	-	
	BZAE230-BC/U	3,1	4,6	4	0,123	2,3	1,6	180	2	22	-	2,8	-	-	-	-	
	BZAE330-BC/U	3,1	4,6	4	0,143	2,3	1,6	180	3	22	-	2,8	-	-	-	-	
	BZAE136-SC/U	3,2	4,6	4	0,116	2,3	1,6	180	1,3	22	-	2,8	2,2	0,7	-	-	
	BZAE236-SC/U	3,2	4,6	4	0,13	2,3	1,6	180	2	22	-	2,8	2,2	0,7	-	-	
	BZAE336-SC/U	3,2	4,6	4	0,15	2,3	1,6	180	3	22	-	2,8	2,2	0,7	-	-	
	BZAE136-BC/U	3,2	4,6	4	0,113	2,3	1,6	180	1,3	22	-	2,8	-	-	-	-	
	BZAE236-BC/U	3,2	4,6	4	0,127	2,3	1,6	180	2	22	-	2,8	-	-	-	-	
	BZAE336-BC/U	3,2	4,6	4	0,147	2,3	1,6	180	3	22	-	2,8	-	-	-	-	
	BZAE142-SC/U	3,2	4,8	4	0,121	2,3	1,6	180	1,3	22	-	3,3	2,4	1	-	-	
	BZAE242-SC/U	3,2	4,8	4	0,135	2,3	1,6	180	2	22	-	3,3	2,4	1	-	-	
	BZAE342-SC/U	3,2	4,8	4	0,155	2,3	1,6	180	3	22	-	3,3	2,4	1	-	-	
	BZAE142-BC/U	3,2	4,8	4	0,118	2,3	1,6	180	1,3	22	-	3,3	-	-	-	-	
	BZAE242-BC/U	3,2	4,8	4	0,132	2,3	1,6	180	2	22	-	3,3	-	-	-	-	
	BZAE342-BC/U	3,2	4,8	4	0,152	2,3	1,6	180	3	22	-	3,3	-	-	-	-	
	BZAE148-SC/U	3,3	4,8	4	0,125	2,4	2	180	1,3	22	-	3,3	2,4	1	-	-	
	BZAE248-SC/U	3,3	4,8	4	0,139	2,4	2	180	2	22	-	3,3	2,4	1	-	-	
	BZAE348-SC/U	3,3	4,8	4	0,159	2,4	2	180	3	22	-	3,3	2,4	1	-	-	

	BZAE148-BC/U	3,3	4,8	4	0,123	2,4	2	180	1,3	22	-	3,3	-	-	-	-
	BZAE248-BC/U	3,3	4,8	4	0,137	2,4	2	180	2	22	-	3,3	-	-	-	-
	BZAE348-BC/U	3,3	4,8	4	0,157	2,4	2	180	3	22	-	3,3	-	-	-	-
	BZAE154-SC/U	3,3	5,2	4	0,129	2,4	2	180	1,3	22	-	3,3	2,4	1	-	-
	BZAE254-SC/U	3,3	5,2	4	0,143	2,4	2	180	2	22	-	3,3	2,4	1	-	-
	BZAE354-SC/U	3,3	5,2	4	0,163	2,4	2	180	3	22	-	3,3	2,4	1	-	-
	BZAE154-BC/U	3,3	5,2	4	0,126	2,4	2	180	1,3	22	-	3,3	-	-	-	-
	BZAE254-BC/U	3,3	5,2	4	0,14	2,4	2	180	2	22	-	3,3	-	-	-	-
	BZAE354-BC/U	3,3	5,2	4	0,16	2,4	2	180	3	22	-	3,3	-	-	-	-

Интерфейс коронки вариант 1		Интерфейс имплантата														
	Номенклатура	dG1	dG2	LG,	Вес,	D1,	D2,	A1,	L2,	A2,	A3,	d2,	И1,	И2,	Н,	SO,
		мм	мм	мм	г	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
Основание титановое (тип 1), совместимо с MIS IMPLANT C1	BGMC133-SC/U	3,3	4,1	5,2	0,136	2,3	1,6	180	1	22	-	2,8	2,2	0,7	-	-
	BGMC233-SC/U	3,3	4,1	6	0,156	2,3	1,6	180	2	22	-	2,8	2,2	0,7	-	-
	BGMC333-SC/U	3,3	4,1	6	0,176	2,3	1,6	180	3	22	-	2,8	2,2	0,7	-	-
	BGMC142-SC/U	3,4	4,2	5,2	0,14	2,4	2	180	1	22	-	3,3	2,4	1	-	-
	BGMC242-SC/U	3,4	4,2	6	0,16	2,4	2	180	2	22	-	3,3	2,4	1	-	-
	BGMC342-SC/U	3,4	4,2	6	0,18	2,4	2	180	3	22	-	3,3	2,4	1	-	-
	BGMC150-SC/U	3,5	4,4	5,2	0,148	2,4	2	180	1	22	-	3,3	2,4	1	-	-
	BGMC250-SC/U	3,5	4,4	6	0,168	2,4	2	180	2	22	-	3,3	2,4	1	-	-
	BGMC350-SC/U	3,5	4,4	6	0,188	2,4	2	180	3	22	-	3,3	2,4	1	-	-
Интерфейс коронки вариант 2		Интерфейс имплантата														
	Номенклатура	dZ1	dZ2	LZ1,	Вес,	D1,	D2,	A1,	L2,	A2,	A3,	d2,	И1,	И2,	Н,	SO,
		мм	мм	мм	г	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
Основание титановое (тип 2), совместимо с MIS IMPLANT C1	BZMC133-SC/U	3,1	4,6	4	0,121	2,3	1,6	180	1	22	-	2,8	2,2	0,7	-	-
	BZMC233-SC/U	3,1	4,6	4	0,141	2,3	1,6	180	2	22	-	2,8	2,2	0,7	-	-
	BZMC333-SC/U	3,1	4,6	4	0,161	2,3	1,6	180	3	22	-	2,8	2,2	0,7	-	-
	BZMC142-SC/U	3,2	4,8	4	0,125	2,4	2	180	1	22	-	3,3	2,4	1	-	-
	BZMC242-SC/U	3,2	4,8	4	0,145	2,4	2	180	2	22	-	3,3	2,4	1	-	-
	BZMC342-SC/U	3,2	4,8	4	0,165	2,4	2	180	3	22	-	3,3	2,4	1	-	-
	BZMC150-SC/U	3,3	5,2	4	0,133	2,4	2	180	1	22	-	3,3	2,4	1	-	-
	BZMC250-SC/U	3,3	5,2	4	0,153	2,4	2	180	2	22	-	3,3	2,4	1	-	-
	BZMC350-SC/U	3,3	5,2	4	0,173	2,4	2	180	3	22	-	3,3	2,4	1	-	-

Интерфейс коронки вариант 1		Интерфейс имплантата														
	Номенклатура	dG1	dG2	LG,	Вес,	D1,	D2,	A1,	L2,	A2,	A3,	d2,	И1,	И2,	Н,	SO,
		мм	мм	мм	г	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с MegaGen AnyRidge	BGMA137-SC/U	3,5	4,2	5,2	0,158	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BGMA237-SC/U	3,5	4,2	6	0,172	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BGMA337-SC/U	3,5	4,2	6	0,192	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BGMA137-FC/U	3,5	4,3	4	0,152	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BGMA237-FC/U	3,5	4,3	4	0,166	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BGMA337-FC/U	3,5	4,3	4	0,186	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
Основание титановое (тип 1), совместимо с MegaGen AnyRidge	BGMA137-BC/U	3,5	4,2	5,2	0,156	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	-	-
	BGMA237-BC/U	3,5	4,2	6	0,17	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	-	-
	BGMA337-BC/U	3,5	4,2	6	0,19	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	-	-
Интерфейс коронки вариант 2		Интерфейс имплантата														
	Номенклатура	dZ1	dZ2	LZ1,	Вес,	D1,	D2,	A1,	L2,	A2,	A3,	d2,	И1,	И2,	Н,	SO,
		мм	мм	мм	г	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
Основание титановое (тип 2) шестигранное,	BZMA137-SC/U	3,2	4,8	4	0,143	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BZMA237-SC/U	3,2	4,8	4	0,157	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BZMA337-SC/U	3,2	4,8	4	0,177	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	2,5	-

совместимо с MegaGen AnyRidge	BZMA137-FC/U	3,3	5,2	4	0,137	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BZMA237-FC/U	3,3	5,2	4	0,151	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BZMA337-FC/U	3,3	5,2	4	0,171	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
Основание титановое (тип 2), совместимо с MegaGen AnyRidge	BZMA137-BC/U	3,3	5,2	4	0,141	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	-	-
	BZMA237-BC/U	3,3	5,2	4	0,155	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	-	-
	BZMA337-BC/U	3,3	5,2	4	0,175	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	-	-

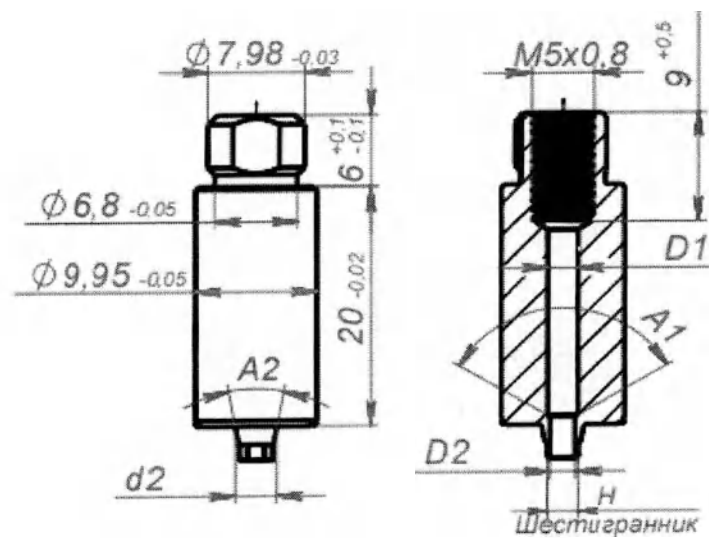
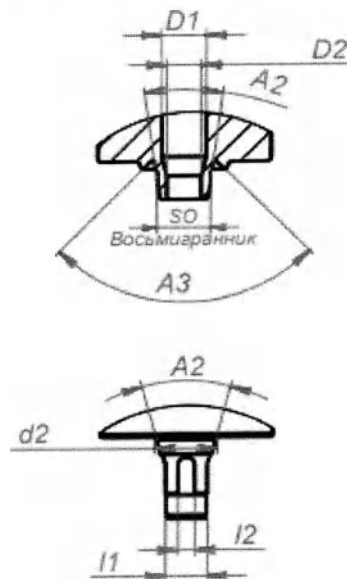
Интерфейс коронки вариант 1		Интерфейс имплантата														
	Номенклатура	dG1	dG2	LG,	Вес,	D1,	D2,	A1,	L2,	A2,	A3,	d2,	I1,	I2,	H,	SO,
		мм	мм	мм	г	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
Основание титановое (тип 1) шестигранное, совместимо с ANTHOGR AXIOM	BGAX154-SC/U	3,5	4,2	5,2	0,162	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BGAX254-SC/U	3,5	4,2	6	0,176	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BGAX354-SC/U	3,5	4,2	6	0,196	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BGAX154-FC/U	3,5	4,2	4	0,156	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BGAX254-FC/U	3,5	4,2	4	0,17	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BGAX354-FC/U	3,5	4,2	4	0,19	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BGAX155-SC/U	3,5	4,3	5,2	0,173	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BGAX255-SC/U	3,5	4,3	6	0,187	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BGAX355-SC/U	3,5	4,3	6	0,207	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BGAX155-FC/U	3,5	4,3	4	0,167	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BGAX255-FC/U	3,5	4,3	4	0,181	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BGAX355-FC/U	3,5	4,3	4	0,201	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
Основание титановое (тип 1), совместимо с ANTHOGR AXIOM	BGAX154-BC/U	3,5	4,2	5,2	0,16	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	-	-
	BGAX254-BC/U	3,5	4,2	6	0,174	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	-	-
	BGAX354-BC/U	3,5	4,2	6	0,194	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	-	-
	BGAX155-BC/U	3,5	4,3	5,2	0,171	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	-	-
	BGAX255-BC/U	3,5	4,3	6	0,185	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	-	-
	BGAX355-BC/U	3,5	4,3	6	0,205	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	-	-
Интерфейс коронки вариант 2		Интерфейс имплантата														
	Номенклатура	dZ1	dZ2	LZ1,	Вес,	D1,	D2,	A1,	L2,	A2,	A3,	d2,	I1,	I2,	H,	SO,
		мм	мм	мм	г	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
Основание титановое (тип 2) шестигранное, совместимо с ANTHOGR AXIOM	BZAX154-SC/U	3,2	4,8	4	0,147	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BZAX254-SC/U	3,2	4,8	4	0,161	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BZAX354-SC/U	3,2	4,8	4	0,181	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BZAX154-FC/U	3,3	5	4	0,141	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BZAX254-FC/U	3,3	5	4	0,155	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BZAX354-FC/U	3,3	5	4	0,175	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BZAX155-SC/U	3,3	4,8	4	0,158	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BZAX255-SC/U	3,3	4,8	4	0,172	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BZAX355-SC/U	3,3	4,8	4	0,192	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BZAX155-FC/U	3,3	5,2	4	0,152	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BZAX255-FC/U	3,3	5,2	4	0,166	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	2,5	-
	BZAX355-FC/U	3,3	5,2	4	0,186	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	2,5	-
Основание титановое (тип 2), совместимо с ANTHOGR AXIOM	BZAX154-BC/U	3,2	4,8	4	0,145	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	-	-
	BZAX254-BC/U	3,2	4,8	4	0,159	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	-	-
	BZAX354-BC/U	3,2	4,8	4	0,179	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	-	-
	BZAX155-BC/U	3,3	4,8	4	0,156	2,4	2	120	1,3	22	-	3,35	-	-	-	-
	BZAX255-BC/U	3,3	4,8	4	0,17	2,4	2	120	2	22	-	3,35	-	-	-	-
	BZAX355-BC/U	3,3	4,8	4	0,19	2,4	2	120	3	22	-	3,35	-	-	-	-

	Интерфейс коронки вариант 1					Интерфейс имплантата										
	Номенклатура	dG1, мм	dG2, мм	LG, мм	Вес, г	D1, мм	D2, мм	A1, мм	L2, мм	A2, мм	A3, мм	d2, мм	I1, мм	I2, мм	H, мм	SO, мм
Основание титановое (тип 1) шестигранное, dG1 3,5 мм, совместимо с НСТ	DA4500SH	3,5	4,5	4	0,124	2,4	2	90	0	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA4510SH	3,5	4,5	4	0,132	2,4	2	90	1	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA4520SH	3,5	4,5	4	0,14	2,4	2	90	2	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA4530SH	3,5	4,5	4	0,148	2,4	2	90	3	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA4540SH	3,5	4,5	4	0,156	2,4	2	90	4	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA4550SH	3,5	4,5	4	0,164	2,4	2	90	5	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA4500MH	3,5	4,5	5,5	0,134	2,4	2	90	0	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA4510MH	3,5	4,5	5,5	0,142	2,4	2	90	1	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA4520MH	3,5	4,5	5,5	0,15	2,4	2	90	2	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA4530MH	3,5	4,5	5,5	0,158	2,4	2	90	3	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA4540MH	3,5	4,5	5,5	0,166	2,4	2	90	4	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA4550MH	3,5	4,5	5,5	0,174	2,4	2	90	5	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA4500LH	3,5	4,5	7	0,144	2,4	2	90	0	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA4510LH	3,5	4,5	7	0,152	2,4	2	90	1	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA4520LH	3,5	4,5	7	0,16	2,4	2	90	2	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA4530LH	3,5	4,5	7	0,168	2,4	2	90	3	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA4540LH	3,5	4,5	7	0,176	2,4	2	90	4	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA4550LH	3,5	4,5	7	0,184	2,4	2	90	5	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA5500SH	3,5	5,5	4	0,128	2,4	2	90	0	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA5510SH	3,5	5,5	4	0,136	2,4	2	90	1	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA5520SH	3,5	5,5	4	0,144	2,4	2	90	2	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA5530SH	3,5	5,5	4	0,152	2,4	2	90	3	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA5540SH	3,5	5,5	4	0,16	2,4	2	90	4	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA5550SH	3,5	5,5	4	0,168	2,4	2	90	5	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA5500MH	3,5	5,5	5,5	0,138	2,4	2	90	0	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA5510MH	3,5	5,5	5,5	0,146	2,4	2	90	1	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA5520MH	3,5	5,5	5,5	0,154	2,4	2	90	2	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA5530MH	3,5	5,5	5,5	0,162	2,4	2	90	3	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA5540MH	3,5	5,5	5,5	0,17	2,4	2	90	4	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA5550MH	3,5	5,5	5,5	0,178	2,4	2	90	5	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA5500LH	3,5	5,5	7	0,148	2,4	2	90	0	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA5510LH	3,5	5,5	7	0,156	2,4	2	90	1	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA5520LH	3,5	5,5	7	0,164	2,4	2	90	2	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA5530LH	3,5	5,5	7	0,172	2,4	2	90	3	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA5540LH	3,5	5,5	7	0,18	2,4	2	90	4	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	DA5550LH	3,5	5,5	7	0,188	2,4	2	90	5	22	-	3,3	-	-	2,5	-
Основание титановое (тип 1), dG1 3,5 мм, совместимо с НСТ	DA4500SN	3,5	4,5	4	0,118	2,4	2	90	0	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA4510SN	3,5	4,5	4	0,126	2,4	2	90	1	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA4520SN	3,5	4,5	4	0,134	2,4	2	90	2	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA4530SN	3,5	4,5	4	0,142	2,4	2	90	3	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA4540SN	3,5	4,5	4	0,15	2,4	2	90	4	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA4550SN	3,5	4,5	4	0,158	2,4	2	90	5	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA4500MN	3,5	4,5	5,5	0,128	2,4	2	90	0	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA4510MN	3,5	4,5	5,5	0,136	2,4	2	90	1	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA4520MN	3,5	4,5	5,5	0,144	2,4	2	90	2	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA4530MN	3,5	4,5	5,5	0,152	2,4	2	90	3	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA4540MN	3,5	4,5	5,5	0,16	2,4	2	90	4	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA4550MN	3,5	4,5	5,5	0,168	2,4	2	90	5	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA4500LN	3,5	4,5	7	0,138	2,4	2	90	0	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA4510LN	3,5	4,5	7	0,146	2,4	2	90	1	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA4520LN	3,5	4,5	7	0,154	2,4	2	90	2	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA4530LN	3,5	4,5	7	0,162	2,4	2	90	3	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA4540LN	3,5	4,5	7	0,17	2,4	2	90	4	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA4550LN	3,5	4,5	7	0,178	2,4	2	90	5	22	-	3,3	-	-	-	-

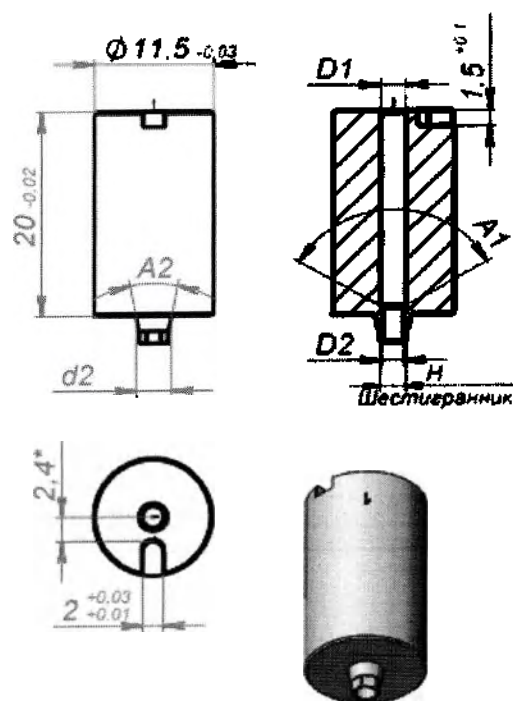
	DA5500SN	3,5	5,5	4	0,124	2,4	2	90	0	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA5510SN	3,5	5,5	4	0,132	2,4	2	90	1	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA5520SN	3,5	5,5	4	0,14	2,4	2	90	2	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA5530SN	3,5	5,5	4	0,148	2,4	2	90	3	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA5540SN	3,5	5,5	4	0,156	2,4	2	90	4	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA5550SN	3,5	5,5	4	0,164	2,4	2	90	5	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA5500MN	3,5	5,5	5,5	0,134	2,4	2	90	0	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA5510MN	3,5	5,5	5,5	0,142	2,4	2	90	1	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA5520MN	3,5	5,5	5,5	0,15	2,4	2	90	2	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA5530MN	3,5	5,5	5,5	0,158	2,4	2	90	3	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA5540MN	3,5	5,5	5,5	0,156	2,4	2	90	4	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA5550MN	3,5	5,5	5,5	0,164	2,4	2	90	5	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA5500LN	3,5	5,5	7	0,144	2,4	2	90	0	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA5510LN	3,5	5,5	7	0,152	2,4	2	90	1	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA5520LN	3,5	5,5	7	0,16	2,4	2	90	2	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA5530LN	3,5	5,5	7	0,168	2,4	2	90	3	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA5540LN	3,5	5,5	7	0,176	2,4	2	90	4	22	-	3,3	-	-	-	-
	DA5550LN	3,5	5,5	7	0,184	2,4	2	90	5	22	-	3,3	-	-	-	-
Основание титановое (тип 1) шестигранное, dG1 3,3 мм, совместимо с НСТ	DAN4500SH	3,3	4,5	4	0,123	2,3	1,6	90	0	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	DAN4510SH	3,3	4,5	4	0,131	2,3	1,6	90	1	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	DAN4520SH	3,3	4,5	4	0,139	2,3	1,6	90	2	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	DAN4530SH	3,3	4,5	4	0,147	2,3	1,6	90	3	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	DAN4540SH	3,3	4,5	4	0,155	2,3	1,6	90	4	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	DAN4550SH	3,3	4,5	4	0,163	2,3	1,6	90	5	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	DAN4500MH	3,3	4,5	5,5	0,133	2,3	1,6	90	0	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	DAN4510MH	3,3	4,5	5,5	0,141	2,3	1,6	90	1	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	DAN4520MH	3,3	4,5	5,5	0,149	2,3	1,6	90	2	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	DAN4530MH	3,3	4,5	5,5	0,157	2,3	1,6	90	3	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	DAN4540MH	3,3	4,5	5,5	0,165	2,3	1,6	90	4	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	DAN4550MH	3,3	4,5	5,5	0,173	2,3	1,6	90	5	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	DAN4500LH	3,3	4,5	7	0,143	2,3	1,6	90	0	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	DAN4510LH	3,3	4,5	7	0,151	2,3	1,6	90	1	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	DAN4520LH	3,3	4,5	7	0,159	2,3	1,6	90	2	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	DAN4530LH	3,3	4,5	7	0,167	2,3	1,6	90	3	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	DAN4540LH	3,3	4,5	7	0,175	2,3	1,6	90	4	22	-	2,8	-	-	2,1	-
	DAN4550LH	3,3	4,5	7	0,183	2,3	1,6	90	5	22	-	2,8	-	-	2,1	-
Основание титановое (тип 1), dG1 3,3 мм, совместимо с НСТ	DAN4500SN	3,3	4,5	4	0,119	2,3	1,6	90	0	22	-	2,8	-	-	-	-
	DAN4510SN	3,3	4,5	4	0,127	2,3	1,6	90	1	22	-	2,8	-	-	-	-
	DAN4520SN	3,3	4,5	4	0,135	2,3	1,6	90	2	22	-	2,8	-	-	-	-
	DAN4530SN	3,3	4,5	4	0,143	2,3	1,6	90	3	22	-	2,8	-	-	-	-
	DAN4540SN	3,3	4,5	4	0,151	2,3	1,6	90	4	22	-	2,8	-	-	-	-
	DAN4550SN	3,3	4,5	4	0,159	2,3	1,6	90	5	22	-	2,8	-	-	-	-
	DAN4500MN	3,3	4,5	5,5	0,129	2,3	1,6	90	0	22	-	2,8	-	-	-	-
	DAN4510MN	3,3	4,5	5,5	0,137	2,3	1,6	90	1	22	-	2,8	-	-	-	-
	DAN4520MN	3,3	4,5	5,5	0,145	2,3	1,6	90	2	22	-	2,8	-	-	-	-
	DAN4530MN	3,3	4,5	5,5	0,153	2,3	1,6	90	3	22	-	2,8	-	-	-	-
	DAN4540MN	3,3	4,5	5,5	0,161	2,3	1,6	90	4	22	-	2,8	-	-	-	-
	DAN4550MN	3,3	4,5	5,5	0,169	2,3	1,6	90	5	22	-	2,8	-	-	-	-
	DAN4500LN	3,3	4,5	7	0,139	2,3	1,6	90	0	22	-	2,8	-	-	-	-
	DAN4510LN	3,3	4,5	7	0,147	2,3	1,6	90	1	22	-	2,8	-	-	-	-
	DAN4520LN	3,3	4,5	7	0,155	2,3	1,6	90	2	22	-	2,8	-	-	-	-
	DAN4530LN	3,3	4,5	7	0,163	2,3	1,6	90	3	22	-	2,8	-	-	-	-
	DAN4540LN	3,3	4,5	7	0,171	2,3	1,6	90	4	22	-	2,8	-	-	-	-
	DAN4550LN	3,3	4,5	7	0,179	2,3	1,6	90	5	22	-	2,8	-	-	-	-
Основание титановое (тип 1) шестигранное,	TiB4001SH	3,2	4	3,75	0,114	2,4	2	90	0,8	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	TiB4002SH	3,2	4	3,75	0,122	2,4	2	90	2	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	TiB4003SH	3,2	4	3,75	0,13	2,4	2	90	3	22	-	3,3	-	-	2,5	-

dG1 3,2 мм, совместимо с НСТ	TiB5001SH	3,2	5	3,75	0,12	2,4	2	90	0,8	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	TiB5002SH	3,2	5	3,75	0,128	2,4	2	90	2	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	TiB5003SH	3,2	5	3,75	0,136	2,4	2	90	3	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	TiB6001SH	3,2	6	3,75	0,126	2,4	2	90	0,8	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	TiB6002SH	3,2	6	3,75	0,134	2,4	2	90	2	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	TiB6003SH	3,2	6	3,75	0,142	2,4	2	90	3	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	TiB4001LH	3,2	4	5,5	0,122	2,4	2	90	0,8	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	TiB4002LH	3,2	4	5,5	0,13	2,4	2	90	2	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	TiB4003LH	3,2	4	5,5	0,138	2,4	2	90	3	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	TiB5001LH	3,2	5	5,5	0,128	2,4	2	90	0,8	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	TiB5002LH	3,2	5	5,5	0,136	2,4	2	90	2	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	TiB5003LH	3,2	5	5,5	0,144	2,4	2	90	3	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	TiB6001LH	3,2	6	5,5	0,134	2,4	2	90	0,8	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	TiB6002LH	3,2	6	5,5	0,142	2,4	2	90	2	22	-	3,3	-	-	2,5	-
	TiB6003LH	3,2	6	5,5	0,15	2,4	2	90	3	22	-	3,3	-	-	2,5	-

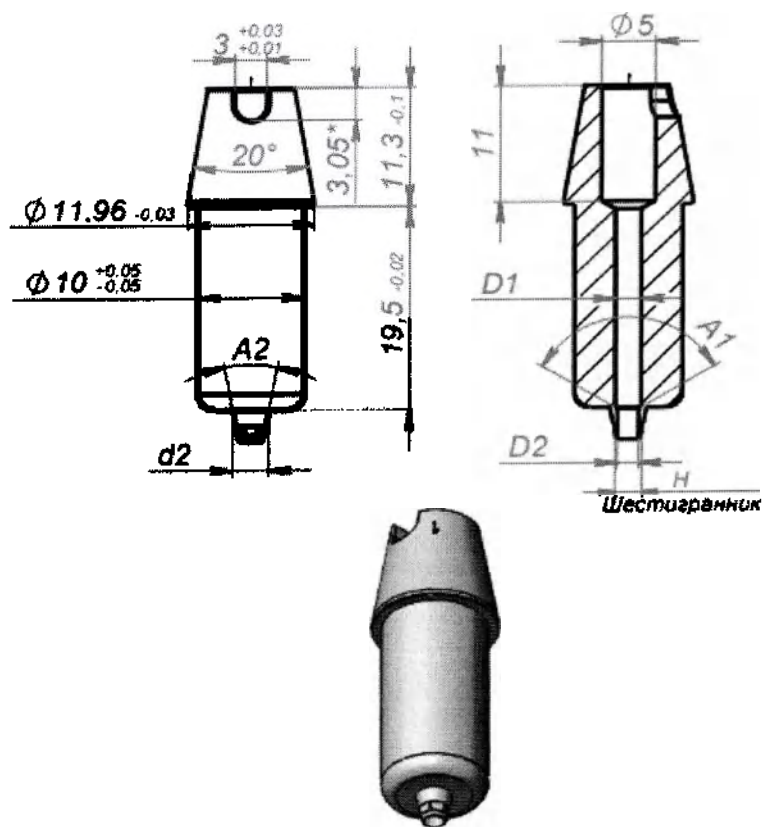
Заготовка премилл абатмента индивидуального



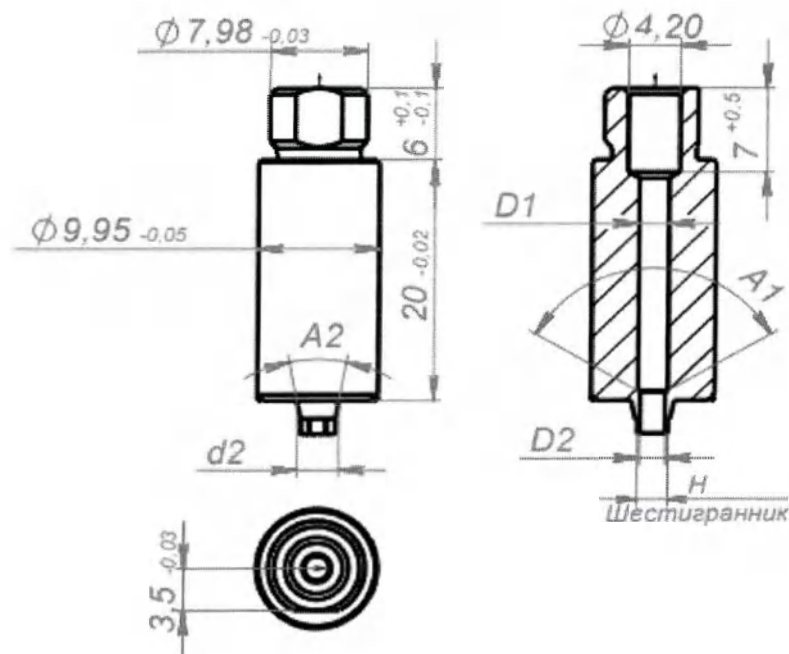
Исполнение 1



Исполнение 2



Исполнение 3



Исполнение 4

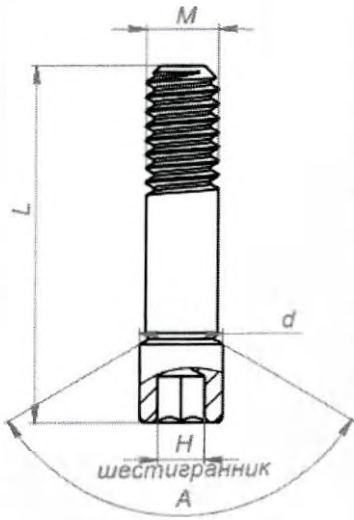
	Исполнение 1	Исполнение 2	Исполнение 3	Исполнение 4
Вес, г	7	8.6	9.3	7

Исполнение 1	Исполнение 2	Исполнение 3	Исполнение 4	A1, мм	D1, мм	D2, мм	A2, мм	d2, мм	H, мм	A3, мм	SO, мм	I1, мм	I2, мм
Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с OSSTEM IMPLANT TS													
BPOM135-A	BPOM135-M	BPOM135-Z	BPOM135-D	90	2,3	1,6	22	2,8	2,1	-	-	-	-
BPOR135-A	BPOR135-M	BPOR135-Z	BPOR135-D	90	2,4	2	22	3,33	2,5	-	-	-	-
Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с DENTIUM SUPERLINE													
BPDI137-A	BPDI137-M	BPDI137-Z	BPDI137-D	120	2,4	2	22	3,35	2,5	-	-	-	-
BPDI237-A	BPDI237-M	BPDI237-Z	BPDI237-D	120	2,4	2	22	3,65	2,5	-	-	-	-
Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с STRAUMANN BONE LEVEL													
BPSB133-A	BPSB133-M	BPSB133-Z	BPSB133-D	60	2,3	1,6	30	2,8	-	-	-	2,2	0,7
BPSB141-A	BPSB141-M	BPSB141-Z	BPSB141-D	60	2,3	1,6	30	3,3	-	-	-	2,4	1
Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с STRAUMANN TISSUE LEVEL													
BPST148-A	BPST148-M	BPST148-Z	BPST148-D	60	2,4	2	16	4,9	-	90	3,1	-	-
BPST165-A	BPST165-M	BPST165-Z	BPST165-D	60	2,4	2	16	5,1	-	90	3,1	-	-
Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с NOBEL BIO CARE ACTIVE													
BPNA135-A	BPNA135-M	BPNA135-Z	BPNA135-D	90	2,4	1,8	24	2,25	-	-	-	-	-
BPNA143-A	BPNA143-M	BPNA143-Z	BPNA143-D	90	2,4	1,8	24	2,65	-	-	-	-	-
Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с NOBEL BRANEMARK													
BPNB135-A	BPNB135-M	BPNB135-Z	BPNB135-D	90	2,4	1,8	16	4,7	-	90	3,1	-	-
BPNB141-A	BPNB141-M	BPNB141-Z	BPNB141-D	90	2,4	1,8	16	4,9	-	90	3,1	-	-
BPNB151-A	BPNB151-M	BPNB151-Z	BPNB151-D	90	2,4	1,8	16	5,1	-	90	3,1	-	-
Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с NOBEL REPLACE													
BPNR135-A	BPNR135-M	BPNR135-Z	BPNR135-D	90	2,4	1,8	24	2,8	2,3	-	-	-	-
BPNR143-A	BPNR143-M	BPNR143-Z	BPNR143-D	90	2,4	1,8	24	3,3	2,6	-	-	-	-

БPNR150-A	БPNR150-M	БPNR150-Z	БPNR150-D	90	2,4	1,8	24	3,8	2,6	-	-	-	-
Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с DENTSPLY XIVE													
БPXF130-A	БPXF130-M	БPXF130-Z	БPXF130-D	180	2,3	1,6	16	2,8	2,2	-	-	-	-
БPXF134-A	БPXF134-M	БPXF134-Z	БPXF134-D	180	2,4	1,8	16	2,8	2,2	-	-	-	-
БPXF138-A	БPXF138-M	БPXF138-Z	БPXF138-D	180	2,4	1,8	16	3,3	2,5	-	-	-	-
БPXF145-A	БPXF145-M	БPXF145-Z	БPXF145-D	180	2,4	2	16	3,3	2,5	-	-	-	-
БPXF155-A	БPXF155-M	БPXF155-Z	БPXF155-D	180	2,4	2	16	3,8	2,6	-	-	-	-
Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с DENTSPLY ANKYLOS													
БPYA135-A	БPYA135-M	БPYA135-Z	БPYA135-D	60	2,3	1,6	22	2,8	2,2	-	-	-	-
БPYA145-A	БPYA145-M	БPYA145-Z	БPYA145-D	60	2,4	1,6	22	3,3	2,4	-	-	-	-
БPYA155-A	БPYA155-M	БPYA155-Z	БPYA155-D	60	2,4	2	22	3,3	2,4	-	-	-	-
Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с BIOMET 3I CERTAIN													
БPBC134-A	БPBC134-M	БPBC134-Z	БPBC134-D	180	2,3	1,6	16	4,9	-	90	3,1	-	-
БPBC141-A	БPBC141-M	БPBC141-Z	БPBC141-D	180	2,3	2	16	5,1	-	90	3,1	-	-
БPBC150-A	БPBC150-M	БPBC150-Z	БPBC150-D	180	2,4	1,6	16	4,9	-	90	3,3	-	-
БPBC160-A	БPBC160-M	БPBC160-Z	БPBC160-D	180	2,4	2	16	5,1	-	90	3,3	-	-
Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с BIOMET 3I OSSEOTITE													
БPBO134-A	БPBO134-M	БPBO134-Z	БPBO134-D	180	2,3	1,6	16	4,9	-	90	3,1	-	-
БPBO141-A	БPBO141-M	БPBO141-Z	БPBO141-D	180	2,4	2	16	5,1	-	90	3,1	-	-
БPBO150-A	БPBO150-M	БPBO150-Z	БPBO150-D	180	2,3	1,6	16	4,9	-	90	3,3	-	-
БPBO160-A	БPBO160-M	БPBO160-Z	БPBO160-D	180	2,4	2	16	5,1	-	90	3,3	-	-
Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с ZIMMER													
БPZI130-A	БPZI130-M	БPZI130-Z	БPZI130-D	180	2,3	1,6	16	4,9	-	90	3	-	-
БPZI135-A	БPZI135-M	БPZI135-Z	БPZI135-D	180	2,4	1,8	16	4,9	-	90	3,1	-	-
БPZI145-A	БPZI145-M	БPZI145-Z	БPZI145-D	180	2,4	1,8	16	4,9	-	90	3,1	-	-
БPZI157-A	БPZI157-M	БPZI157-Z	БPZI157-D	180	2,4	2	16	4,9	-	90	3,3	-	-
Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с ASTRA TECH OSSEOSPEED													
БPAO130-A	БPAO130-M	БPAO130-Z	БPAO130-D	180	2,3	1,6	22	2,5	2	-	-	-	-
БPAO135-A	БPAO135-M	БPAO135-Z	БPAO135-D	180	2,3	1,6	22	2,8	2,1	-	-	-	-
БPAO145-A	БPAO145-M	БPAO145-Z	БPAO145-D	180	2,5	2	22	3,3	2,5	-	-	-	-
Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с ASTRA EV SYSTEM													
БPAE130-A	БPAE130-M	БPAE130-Z	БPAE130-D	180	2,3	1,6	22	2,8	-	-	-	2,2	0,7
БPAE136-A	БPAE136-M	БPAE136-Z	БPAE136-D	180	2,3	1,6	22	3	-	-	-	2,2	0,7
БPAE142-A	БPAE142-M	БPAE142-Z	БPAE142-D	180	2,3	1,6	22	3,3	-	-	-	2,4	1
БPAE148-A	БPAE148-M	БPAE148-Z	БPAE148-D	180	2,4	2	22	3,3	-	-	-	2,4	1
БPAE154-A	БPAE154-M	БPAE154-Z	БPAE154-D	180	2,4	2	22	3,5	-	-	-	2,4	1
Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с MIS IMPLANT C1													
БPMC133-A	БPMC133-M	БPMC133-Z	БPMC133-D	180	2,3	1,6	22	2,8	-	-	-	2,2	0,7
БPMC142-A	БPMC142-M	БPMC142-Z	БPMC142-D	180	2,4	2	22	3,3	-	-	-	2,4	1
БPMC150-A	БPMC150-M	БPMC150-Z	БPMC150-D	180	2,4	2	22	3,3	-	-	-	2,4	1
Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с MegaGen AnyRidge													
БPMA137-A	БPMA137-M	БPMA137-Z	БPMA137-D	180	2,4	1,8	16	3,35	2,5	-	-	-	-
Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с ANTHOGRYR AXIOM													
БPAX137-A	БPAX137-M	БPAX137-Z	БPAX137-D	120	2,4	2	22	3,35	2,5	-	-	-	-
Заготовка премилл абатмента индивидуального, совместима с НСТ													
-	-	-	TiB10	90	2,4	2	22	3,3	2,5	-	-	-	-
-	-	-	TiB12	90	2,4	2	22	3,3	2,5	-	-	-	-

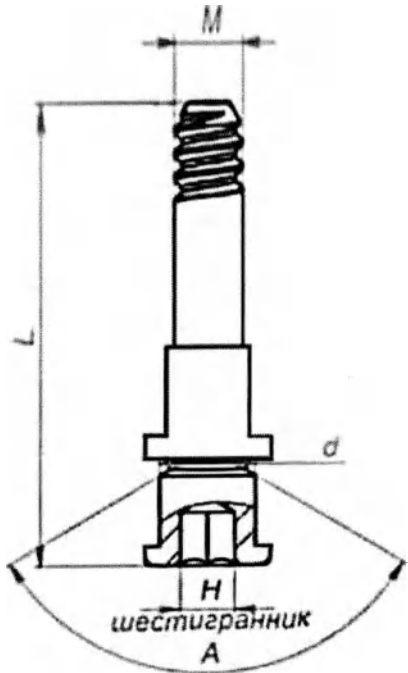
-	-	-	TiB14	90	2,4	2	22	3,3	2,5	-	-	-	-
-	-	-	TiB10N	90	2,4	2	22	3,3	-	-	-	-	-
-	-	-	TiB12N	90	2,4	2	22	3,3	-	-	-	-	-
-	-	-	TiB14N	90	2,4	2	22	3,3	-	-	-	-	-

Винт фиксирующий

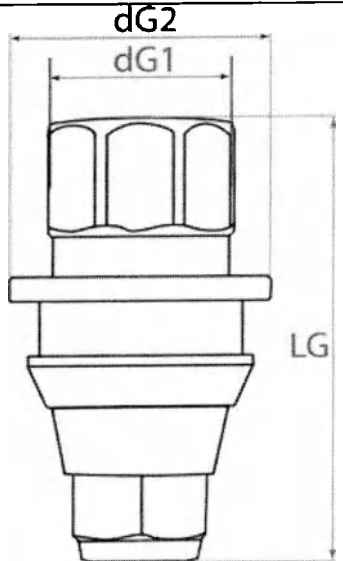
Наименование	Внешний вид	Номенклатура	M, мм	L, мм	D, мм	H, мм	A, мм	Вес, г
Винт фиксирующий, совместим с OSSTEM IMPLANT TS		BSOM135	1.6	8	2.25	1,2	90	0,087
		BSOR140	2	8.2	2.34	1,2	90	0,097
Винт фиксирующий, совместим с DENTIUM SUPERLINE		BSDI137/237	2	10.2	2.32	1,3	118	0,124
Винт фиксирующий, совместим с STRAUMANN BONE LEVEL		BSSB133/141	1.6	10	2.2	1.4	60	0,086
Винт фиксирующий, совместим с STRAUMANN TISSUE LEVEL		BSST148	2	8	2.3	1.4	60	0,092
		BSST165	2	10	2.3	1.4	60	0,11
Винт фиксирующий, совместим с NOBEL BIOCARE ACTIVE		BSNA135	1.8	9	2.3	1.5	90	0,04
		BSNA143	1.8	10	2.3	1.5	90	0,07
Винт фиксирующий, совместим с NOBEL BRANEMARK		BSNB135	1.8	9	2.3	1.5	90	0,05
		BSNB141	1.8	10	2.3	1.5	90	0,075
		BSNB151	1.8	12	2.3	1.5	90	0,93
Винт фиксирующий, совместим с NOBEL REPLACE		BSNR135	1.8	8	2.3	1.5	90	0,06
		BSNR143	1.8	10	2.3	1.5	90	0,074
		BSNR150	1.8	12	2.3	1.5	90	0,082
Винт фиксирующий, совместим с DENTSPLY XIVE		BSXF130	1.6	8	2.2	1.3	180	0,052
		BSXF134	1.6	10	2.3	1.3	180	0,085
		BSXF138	1.8	10	2.3	1.3	180	0,1
		BSXF145	2	8	2.3	1.3	180	0,121
		BSXF155	2	10	2.3	1.3	180	0,12
Винт фиксирующий, совместим с BIOMET 3I CERTAIN		BSBC134	1.6	8	2.2	1.2	180	0,05
		BSBC141	1.6	10	2.2	1.2	180	0,055
		BSBC150	2	8	2.3	1.2	180	0,08
		BSBC160	2	10	2.3	1.2	180	0,09
Винт фиксирующий, совместим с		BSBO134	1.6	9	2.2	1.2	180	0,06
		BSBO141	1.6	11	2.2	1.2	180	0,065
		BSBO150	2	9	2.3	1.2	180	0,085
		BSBO160	2	11	2.3	1.2	180	0,092

BIOMET 3I OSSEOTITE							
Винт фиксирующий, совместим с ZIMMER	BSZI130	1.6	8	2.2	1.2	180	0,061
	BSZI135	1.6	10	2.2	1.2	180	0,072
	BSZI145	1.8	10	2.3	1.2	180	0,08
	BSZI157	2	10	2.3	1.2	180	0,1
Винт фиксирующий, совместим с ASTRA TECH OSSEOSPEED	BSAO130	1.6	10	2.2	1.3	180	0,066
	BSAO135	2	8	2.3	1.3	180	0,093
	BSAO145	2	10	2.3	1.3	180	0,11
Винт фиксирующий, совместим с ASTRA EV SYSTEM	BSAE130	1.6	8	2.2	1.2	180	0,053
	BSAE136	1.6	10	2.2	1.2	180	0,06
	BSAE142	1.6	12	2.2	1.2	180	0,068
	BSAE148	2	8	2.3	1.2	180	0,093
	BSAE154	2	10	2.3	1.2	180	0,123
Винт фиксирующий, совместим с MIS IMPLANT C1	BSMC133	1.6	10	2.2	1.2	180	0,07
	BSMC142	2	8	2.3	1.2	180	0,12
	BSMC150	2	10	2.3	1.2	180	0,125
Винт фиксирующий, совместим с MegaGen AnyRidge	BSMA135	1.8	8	2.1	1.2	180	0,06
Винт фиксирующий, совместим с ANTHOGRYR AXIOM	BSAX135	1.6	8	2.2	1.2	30	0,06
Винт фиксирующий, совместим с НСТ	SC2585	2	8.5	2.45	1.2	90	0,093
	SC2285	2	8.5	2.15	1.2	90	0,085
	SC2275	1.6	7.5	2.15	1.2	180	0,07
	SC2265	1.6	6.5	2.15	1.2	180	0,065
Винт фиксирующий мультитионит	BSMU2013	1.8	5	2.3	1.3	120	0,045
	BSMU1413	1.4	4	2.2	1.4	180	0,03

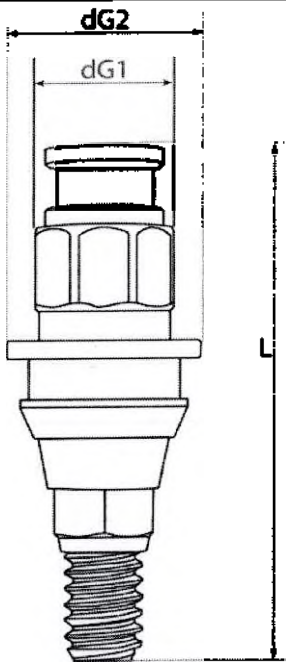
Винт имплантовода

Наименование	Внешний вид	Номенклатура	M, мм	d, мм	L, мм	H, мм	A	Вес, г
Винт имплантовода		BVI001	1,6	1,6	10	1,2	90	0,112

Тело имплантовода

Наименование	Внешний вид	Номенклатура	dG1, мм	dG2, мм	LG, мм	Вес, г
Тело имплантовода		BTI001	3,4	4	6	0,154

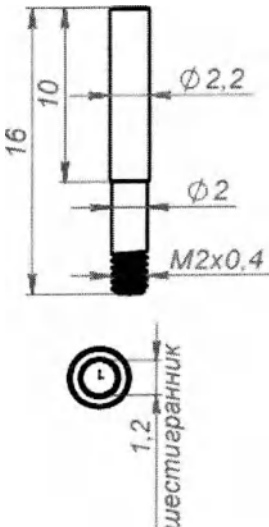
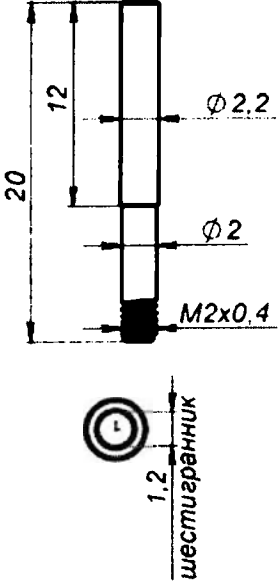
Имплантовод в сборе

Наименование	Внешний вид	Номенклатура	dG1, мм	dG2, мм	LG, мм	Вес, г
Имплантовод в сборе		ВК1001	3,4	4	8	0,266

Винт трансфера слепочного для открытой ложки

Наименование	Внешний вид	Номенклатура	Вес, г
Винт трансфера слепочного для открытой ложки	На рисунке все размеры указаны в мм.	BSTR001S	0,6
	На рисунке все размеры указаны в мм.	BSTR001L	0,71

Винт трансфера слепочного для закрытой ложки

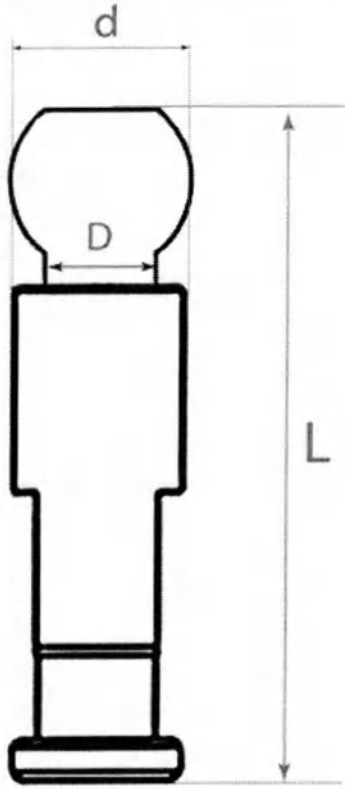
Наименование	Внешний вид	Номенклатура	Вес, г
Винт трансфера слепочного для закрытой ложки	 На рисунке все размеры указаны в мм.	BSTH001S	0,23
	 На рисунке все размеры указаны в мм.	BSTH001L	0,35

Аналог имплантата лабораторный

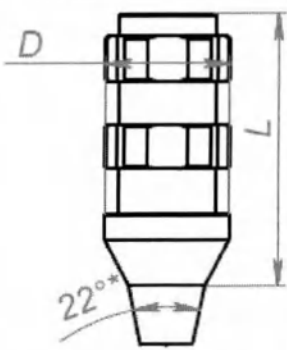
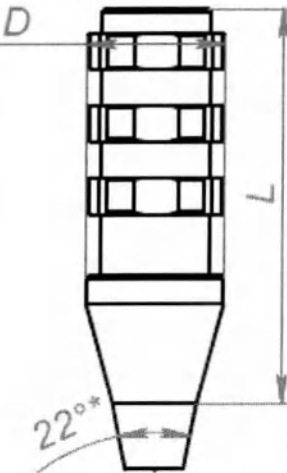
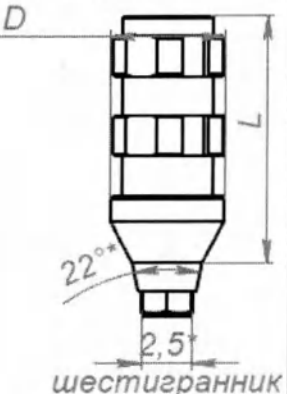
Наименование	Внешний вид	Номенклатура	L, мм	d, мм	A, мм	M, мм	H, мм	SO, мм	A1, мм	d1, мм	Вес, г
Аналог имплантата лабораторный, совместим с OSSTEM IMPLANT TS		BROM135	10	4	22	1.6	2.1	-	-	2.8	0,68
Аналог имплантата лабораторный, совместим с DENTIUM SUPERLINE		BROR135	12	4.5	22	2	2.5	-	-	3.33	0,886
		BRDI137	12	4	22	2	2.5	-	-	3.35	0,696
Аналог имплантата лабораторный, совместим с STRAUMANN BONE LEVEL			BRDI237	12	4.5	22	2	2.5	-	-	3.35
Аналог имплантата лабораторный, совместим с STRAUMANN TISSUE LEVEL	BRSB133		10	4	30	1.6	2.2	-	-	2.8	0,55
	BRSB141		12	4.5	30	1.6	2.4	-	-	3.3	0,88
Аналог имплантата лабораторный, совместим с NOBEL BIOCARE ACTIVE			BRST148	10	4	16	2	-	3.1	90	4.9
		BRST165	12	4.5	16	2	-	3.1	90	4.9	0,61
Аналог имплантата лабораторный, совместим с NOBEL BRANEMARK		BRNA135	10	4	24	1.6	2.25	-	-	2.8	0,765
		BRNA143	12	4.5	24	2	2.65	-	-	3.3	0,816
Аналог имплантата лабораторный, совместим с NOBEL REPLACE		BRNB135	10	4	16	1.6	-	3.1	90	4.9	0,684
		BRNB141	11	4.5	16	1.6	-	3.1	90	4.9	0,802
Аналог имплантата лабораторный, совместим с DENTSPLY XIVE		BRNB151	12	4.5	16	2	-	3.1	90	4.9	0,854
		BRNR135	10	4	24	1.8	2.3	-	-	2.8	0,702
Аналог имплантата лабораторный, совместим с DENTSPLY ANKYLOS		BRNR143	11	4.5	24	2	2.3	-	-	3.3	0,8
		BRNR150	12	4.5	24	2	2.6	-	-	3.8	0,864
		BRXF130	10	4	16	1.6	2.2	-	90	2.8	0,647
		BRXF134	11	4.5	16	1.6	2.5	-	90	2.8	0,723
		BRXF138	12	4.5	16	1.8	2.5	-	90	3.3	0,812
		BRXF145	10	4	16	2	2.6	-	90	3.3	0,715
		BRXF155	12	4.5	16	2	2.6	-	90	3.8	0,863
		BRYA135	10	4	22	1.6	2.2	-	-	2.8	0,628
		BRYA145	10	4	22	1.8	2.4	-	-	2.8	0,693
		BRYA155	12	4.5	22	2	2.4	-	-	3.3	0,736

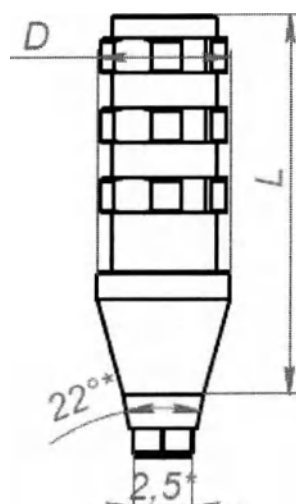
Аналог имплантата лабораторный, совместим с BIOMET 3I CERTAIN	BRBC134	9	4	16	1.6	-	3.1	90	4.9	0,598
	BRBC141	10	4.2	16	1.6	-	3.1	90	4.9	0,665
	BRBC150	11	4.4	16	2	-	3.3	90	4.9	0,7
Аналог имплантата лабораторный, совместим с BIOMET 3I OSSEOTITE	BRBC160	12	4.6	16	2	-	3.3	90	4.9	0,748
	BRBO134	9	4	16	1.6	-	3.1	90	4.9	0,612
	BRBO141	10	4.2	16	1.6	-	3.1	90	4.9	0,689
	BRBO150	11	4.2	16	2	-	3.3	90	4.9	0,712
Аналог имплантата лабораторный, совместим с ZIMMER	BRBO160	12	4.6	16	2	-	3.3	90	4.9	0,777
	BRZI130	9	2	16	1.6	-	3	90	4.9	0,633
	BRZI135	10	4.2	16	1.6	-	3.1	90	4.9	0,721
	BRZI145	11	4.4	16	1.8	-	3.1	90	4.9	0,769
Аналог имплантата лабораторный, совместим с ASTRA TECH OSSEOSPEED	BRZI157	12	4.6	16	2	-	3.3	90	4.9	0,831
	BRAO130	10	4	22	1.6	2	-	-	2.5	0,74
	BRAO135	10	4	22	1.6	2.1	-	-	2.8	0,785
Аналог имплантата лабораторный, совместим с ASTRA EV SYSTEM	BRAO145	12	4.6	22	2	2.5	-	-	3.3	0,822
	BRAE130	10	4	22	1.6	2.2	-	-	2.8	0,729
	BRAE136	12	4.2	22	1.6	2.2	-	-	3.3	0,834
	BRAE142	10	4	22	2	2.4	-	-	2.8	0,868
	BRAE148	10	4.2	22	2	2.4	-	-	3	0,903
	BRAE154	12	4.5	22	2	2.4	-	-	3.3	0,941
Аналог имплантата лабораторный, совместим с MIS IMPLANT C1	BRMC133	10	4	22	1.6	2.2	-	-	2.8	0,626
	BRMC142	11	4.2	22	2	2.2	-	-	3.3	0,734
	BRMC150	12	4.5	22	2	2.4	-	-	3.3	0,794
Аналог имплантата лабораторный, совместим с MegaGen AnyRidge	BRMA137	12	4.4	10	1.8	2.3	-	-	3.1	0.92
Аналог имплантата лабораторный, совместим с HCT	BRN001	12	4.5	22	2	2.5	-	-	3.33	0.807
Аналог имплантата лабораторный мультиюнит	BRMUA4514	12	4	44	1.4	2.2	-	-	2.5	1,135

Аналог для абатмента шарикового

Аналог для абатмента шарикового				
Внешний вид				
	Номенклатура	d, мм	D, мм	L, мм
	BBAL40	4	3	12
				Вес, г
				0,2

Трансфер слепочный для открытой ложки

Наименование	Внешний вид	Номенклатура	D, мм	L, мм	Общая длина, мм	Вес, г
Трансфер слепочный для открытой ложки	 На рисунке все размеры (кроме угловых) указаны в мм. * - размеры одинаковы для всех артикулов.	TRO45SN	4,5	16	18,7	0,62
		TRO55SN	5,5	16	18,7	1,21
		TRO65SN	6,5	16	18,7	1,92
	 На рисунке все размеры (кроме угловых) указаны в мм. * - размеры одинаковы для всех артикулов.	TRO45LN	4,5	20	22,7	1,33
		TRO55LN	5,5	20	22,7	1,43
		TRO65LN	6,5	20	22,7	2,14
Трансфер слепочный для открытой ложки шестигранный	 На рисунке все размеры (кроме угловых) указаны в мм. * - размеры одинаковы для всех артикулов.	TRO45SH	4,5	16	18,7	0,73
		TRO55SH	5,5	16	18,7	1,32
		TRO65SH	6,5	16	18,7	2,03



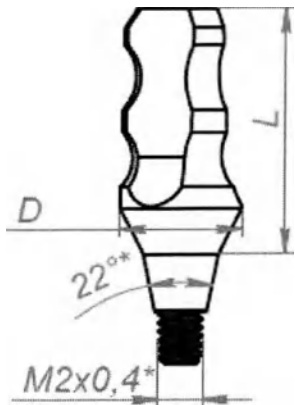
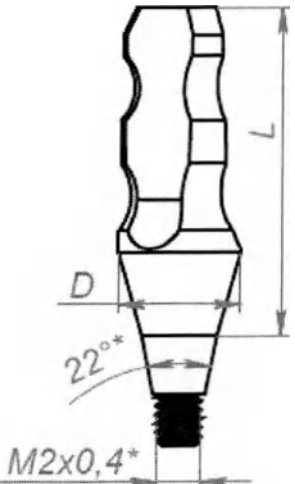
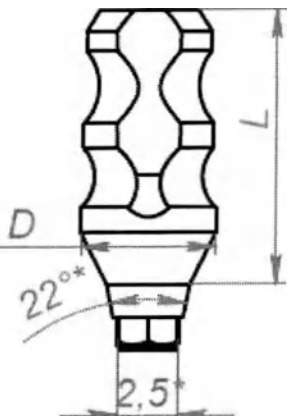
шестигранник

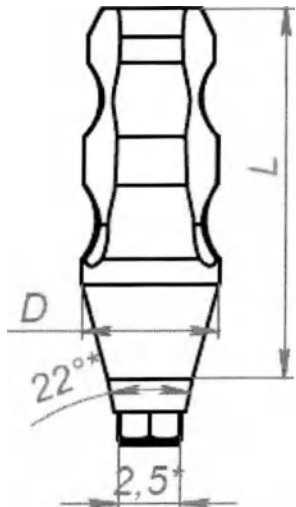
На рисунке все размеры
(кроме угловых) указаны в
мм.

* - размеры одинаковы для
всех артикулов.

TRO45LH	4,5	20	22,7	1,44
TRO55LH	5,5	20	22,7	1,54
TRO65LH	6,5	20	22,7	2,25

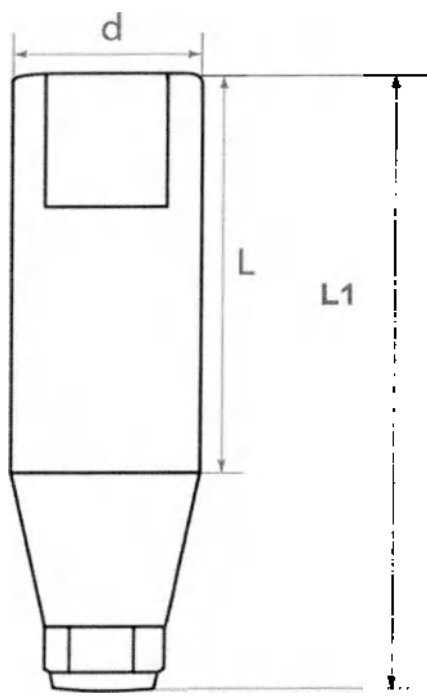
Трансфер слепочный для закрытой ложки

Наименование	Внешний вид	Номенклатура	D, мм	L, мм	Общая длина, мм	Вес, г
Трансфер слепочный для закрытой ложки	 На рисунке все размеры (кроме угловых) указаны в мм. * - размеры одинаковы для всех артикулов.	TRC45SN	4,5	11	16,1	0,67
		TRC55SN	5,5	11	16,1	1,16
		TRC65SN	6,5	11	16,1	1,81
	 На рисунке все размеры (кроме угловых) указаны в мм. * - размеры одинаковы для всех артикулов.	TRC45LN	4,5	15	20,1	1,38
		TRC55LN	5,5	15	20,1	2,03
		TRC65LN	6,5	15	20,1	2,88
Трансфер слепочный для закрытой ложки шестигранный	 шестиграннык На рисунке все размеры (кроме угловых) указаны в мм. * - размеры одинаковы для всех артикулов.	TRC45SH	4,5	11	13,7	0,62
		TRC55SH	5,5	11	13,7	1,11
		TRC65SH	6,5	11	13,7	1,76

 шестигранник На рисунке все размеры (кроме угловых) указаны в мм. * - размеры одинаковы для всех артикулов.	TRC45LH	4,5	15	17,7	1,33
	TRC55LH	5,5	15	17,7	1,82
	TRC65LH	6,5	15	17,7	2,47

Скан-маркер НСТ

Скан-маркер НСТ

Внешний вид				
	Номенклатура	d, мм	L, мм	L1, мм
	SM438	3	8	12
				Вес, г
				0,432

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

-110- лист(ов)

