

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО НПФ "Поток Интер"

Ощепков О.В.

М.П. (подпись)



« 06 »

09

2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
УСТАНОВКА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА УОВ «ПОТОК 150-М-01» с
воздухораспределителем по ТУ 32.50.50-002-40178340-2021 в вариантах
исполнения

Производства ООО НПФ «Поток Интер»
115162, МОСКВА ГОРОД, ХАВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 18, КОРПУС 2



В Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения
109074, г. Москва,
Славянская пл., д. 4, стр.1


Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Поток Интер» настоящим дает пояснение, что регистрируемое медицинское изделие «Установка обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01» с воздухораспределителем по ТУ 32.50.50-002-40178340-2021», производится в различных вариантах исполнения, образующих модельный ряд изделий.

Представлены выборочные изображения вариантов исполнения изделия. Все остальные варианты исполнения внешне отличаются только габаритными размерами корпуса изделия и транспортной упаковки, и имеют минимальные визуальные отличия. Все варианты исполнения данного медицинского изделия имеют одинаковый принцип работы, и обеспечивают заявленные эффективность обеззараживания воздуха и эффективность фильтрации воздуха, сопоставимую с эффективностью (HEPA) фильтров высокоэффективной очистки воздуха за счет одинакового внутреннего конструктивного исполнения элементов (электродов), обеспечивающих реализацию физического метода обеззараживания воздуха постоянными электрическими полями высокой напряженности. Все изделия имеют внешний корпус с входными фланцами для монтажа в составе системы вентиляции и кондиционирования воздуха и воздухораспределителем для подачи однонаправленного потока воздуха в помещение. Наименование изделия и его основные характеристики указаны на маркировке, наклейке-шильдиках. Пульт дистанционного управления для всех вариантов исполнения идентичен.

Все изделия имеют в составе рециркуляционную колонну и рециркуляционный модуль, которые поставляются при необходимости в зависимости от проектных решений. Колонна рециркуляции и рециркуляционный модуль предназначены для забора части воздуха из обслуживаемого помещения и обратной подачи рециркуляционного воздуха на вход в Установку во всех исполнениях (при необходимости) в соответствии с проектными решениями для обеспечения требуемого расхода воздуха из изделия и воздухообмена в помещении и не влияет на эффективность обеззараживания воздуха и эффективность фильтрации воздуха.

Все варианты исполнения изделия имеют в качестве принадлежности однотипные занавеси (щитки), не имеют визуальных отличий, состоят из составных элементов. Щитки применяются при необходимости для распределения однонаправленного потока воздуха на выходе из воздухораспределителя и предотвращения преждевременного растекания потока воздуха. Для всех исполнений высота щитков одинаковая, а длина и ширина щитков соответствует длине и ширине периметра изделия варианта исполнения изделия.


Медицинское изделие является составной частью системы вентиляции и кондиционирования воздуха и целиком изделие с принадлежностями монтируется и запускается на этапе монтажных и пусконаладочных работ в помещениях лечебно-профилактических учреждений.

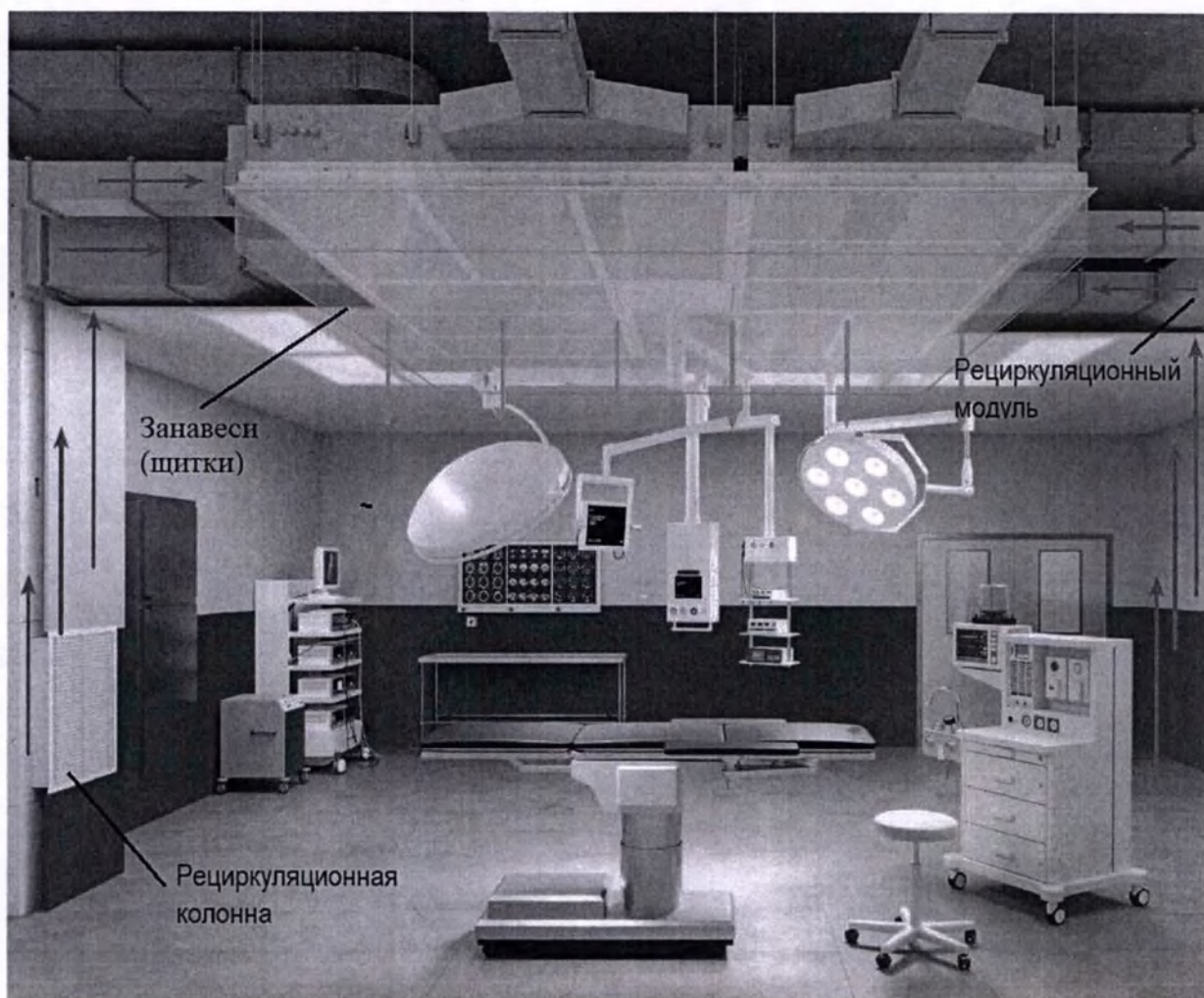

Учитывая вышеизложенное, просим принять в целях государственной регистрации медицинского изделия «Установка обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01» с воздухораспределителем по ТУ 32.50.50-002-40178340-2021» нижеуказанные фотографические изображения с распространением прилагаемых фотографий на весь модельный ряд регистрируемых изделий.

Генеральный директор
ООО НПФ «Поток Интер»

"06" 09 2024г.

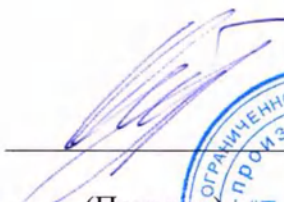(Подпись)  

Ощепков О.В.

Рис. 1. Установка обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01» с
воздухораспределителем в варианте исполнения ВР600,
по ТУ 32.50.50-002-40178340-2021.

Общий вид.



Рис. 2. Установка обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01» с
воздухораспределителем в варианте исполнения ВР2250,
по ТУ 32.50.50-002-40178340-2021.

Общий вид.



Рис. 3. Установка обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01» с
 воздухораспределителем в варианте исполнения ВР600,
 по ТУ 32.50.50-002-40178340-2021.
 Маркировка. Наклейка-шильдик.

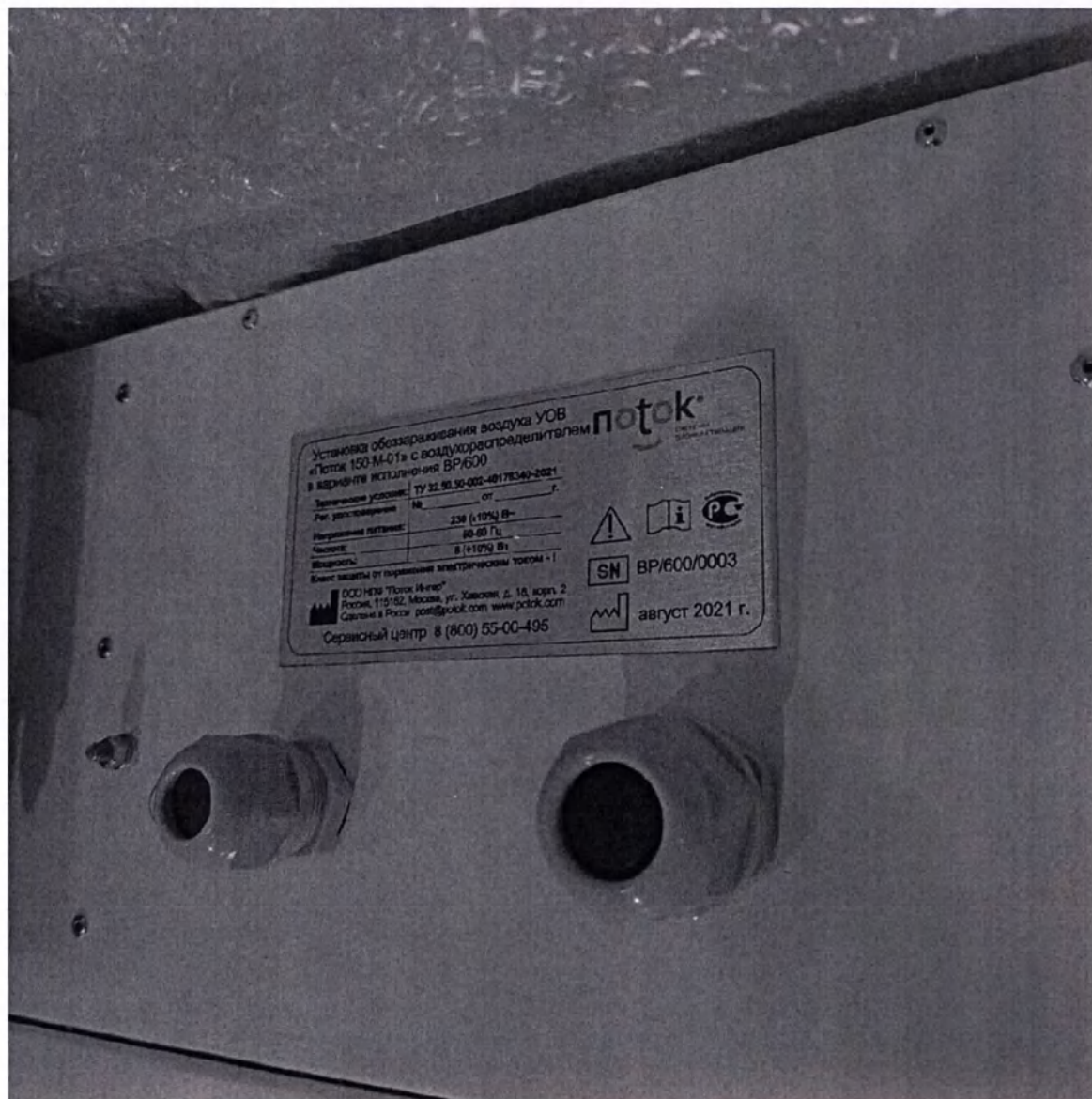


Рис. 4. Установка обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01» с
 воздухораспределителем в варианте исполнения ВР2250,
 по ТУ 32.50.50-002-40178340-2021.
 Маркировка. Наклейка-шильдик.

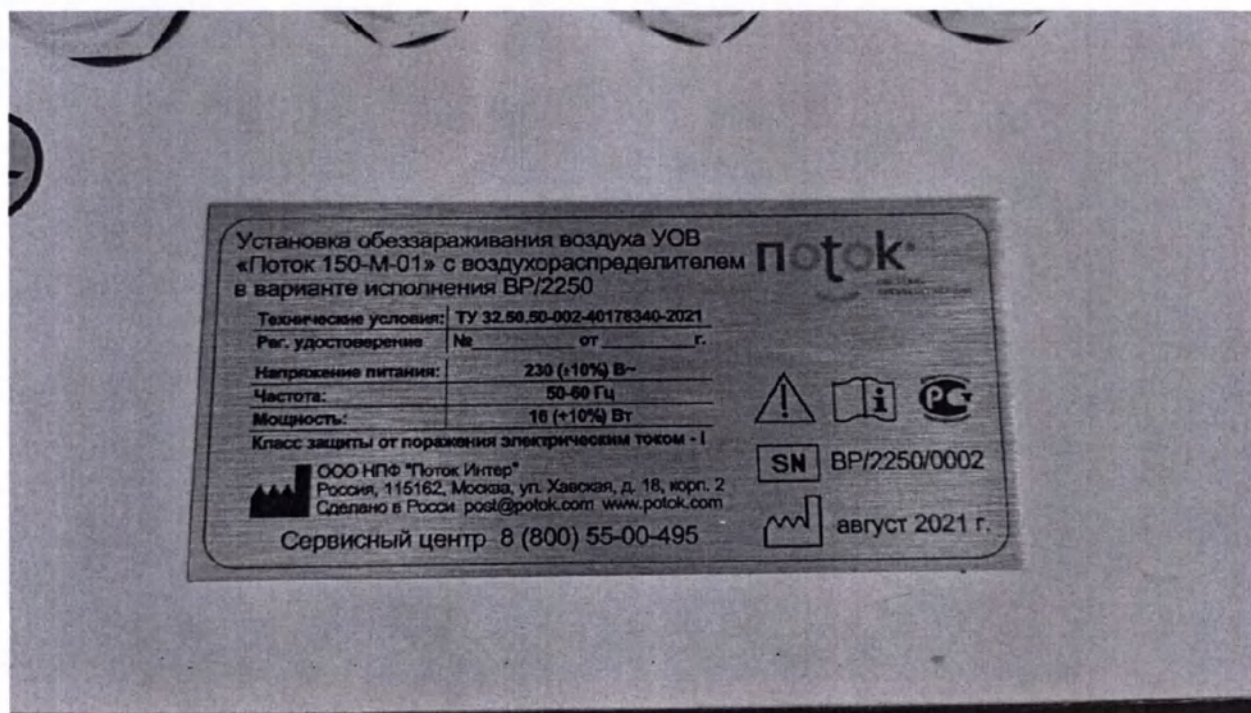


Рис. 5. Установка обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01» с
воздухораспределителем в варианте исполнения ВР600,
по ТУ 32.50.50-002-40178340-2021.

Внешний вид транспортной упаковки.



Рис. 6. Установка обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01» с
воздухораспределителем в варианте исполнения ВР2250,
по ТУ 32.50.50-002-40178340-2021.
Внешний вид транспортной упаковки.

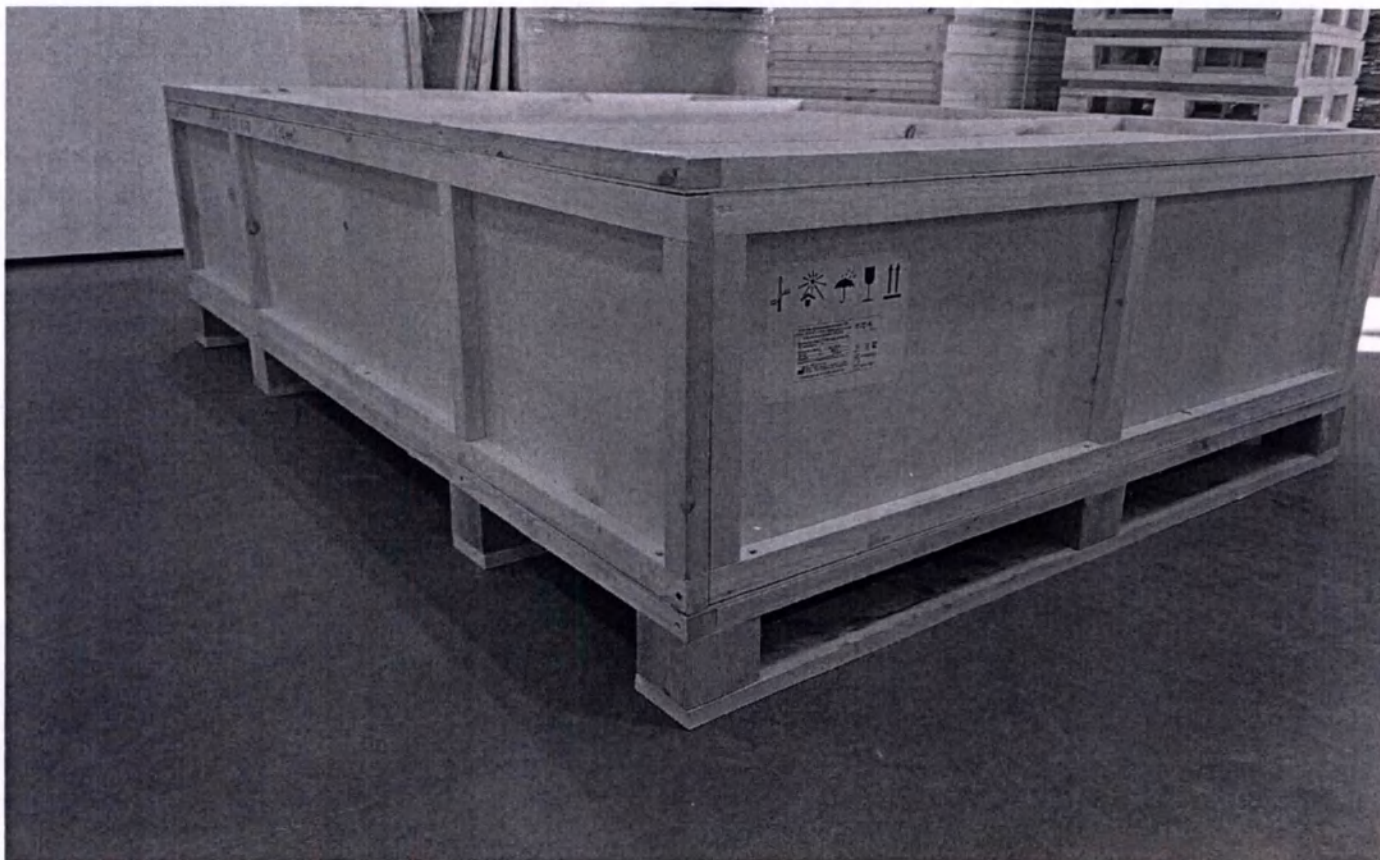


Рис. 7. Установка обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01» с
воздухораспределителем в варианте исполнения ВР2250,
по ТУ 32.50.50-002-40178340-2021.

Пульт управления, вид спереди. Маркировка.



Рис. 8. Установка обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01» с
 воздухораспределителем в варианте исполнения ВР2250,
 по ТУ 32.50.50-002-40178340-2021.
 Пульт управления, вид сзади. Маркировка.



Рис. 9. Установка обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01» с
воздухораспределителем в вариантах исполнения,
по ТУ 32.50.50-002-40178340-2021.
Фильтр очистки воздуха общего назначения

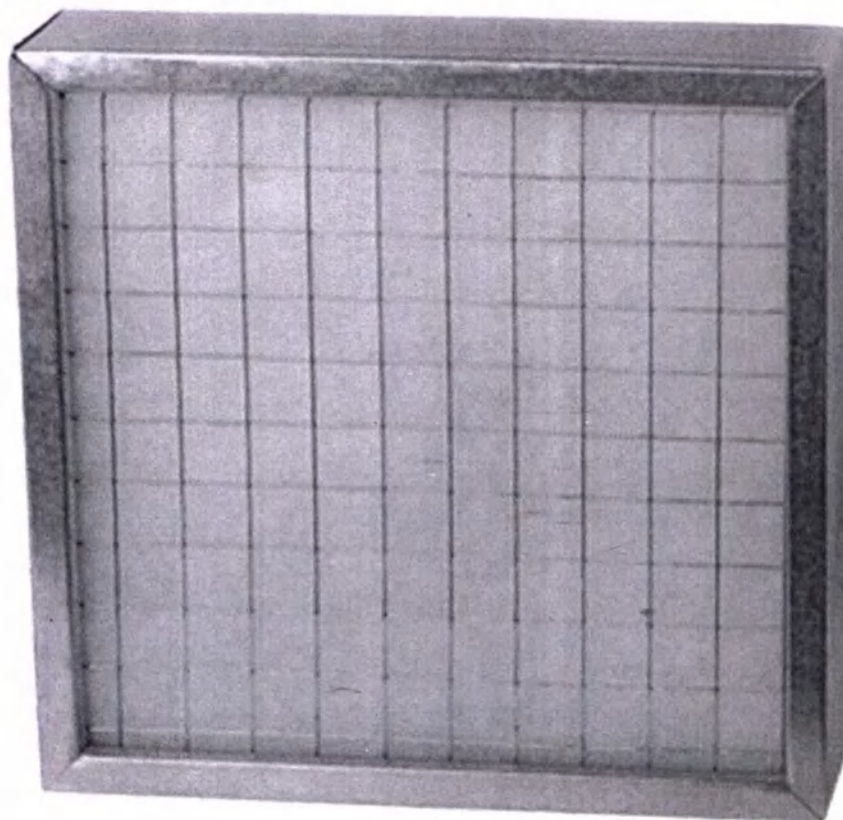


Рис. 10. Установка обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01» с
воздухораспределителем в вариантах исполнения,
по ТУ 32.50.50-002-40178340-2021.
Фильтр высокоэффективной очистки воздуха.



Рис. 11. Установка обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01» с
воздухораспределителем в вариантах исполнения,
по ТУ 32.50.50-002-40178340-2021.
Рециркуляционная колонна.

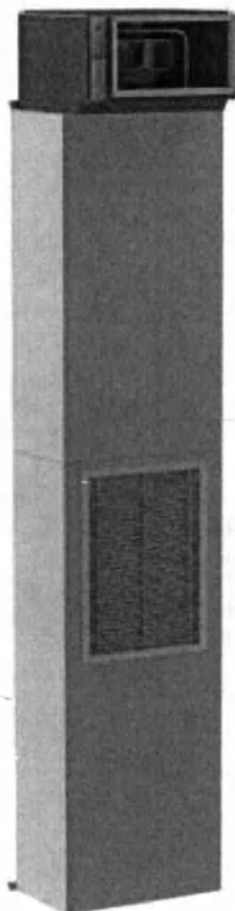


Рис. 12. Установка обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01» с
воздухораспределителем в вариантах исполнения,
по ТУ 32.50.50-002-40178340-2021.
Рециркуляционный модуль.

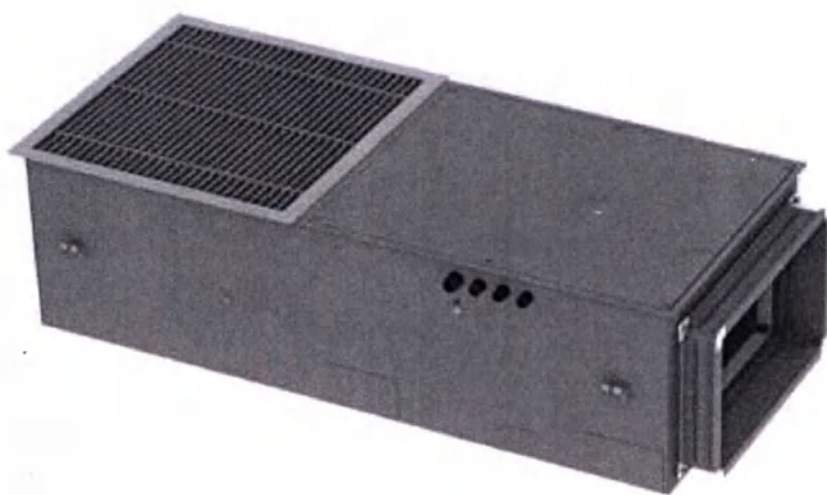


Рис. 13. Установка обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01» с
воздухораспределителем в вариантах исполнения, по ТУ 32.50.50-002-40178340-2021.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Занавеси (щитки) в сборе.

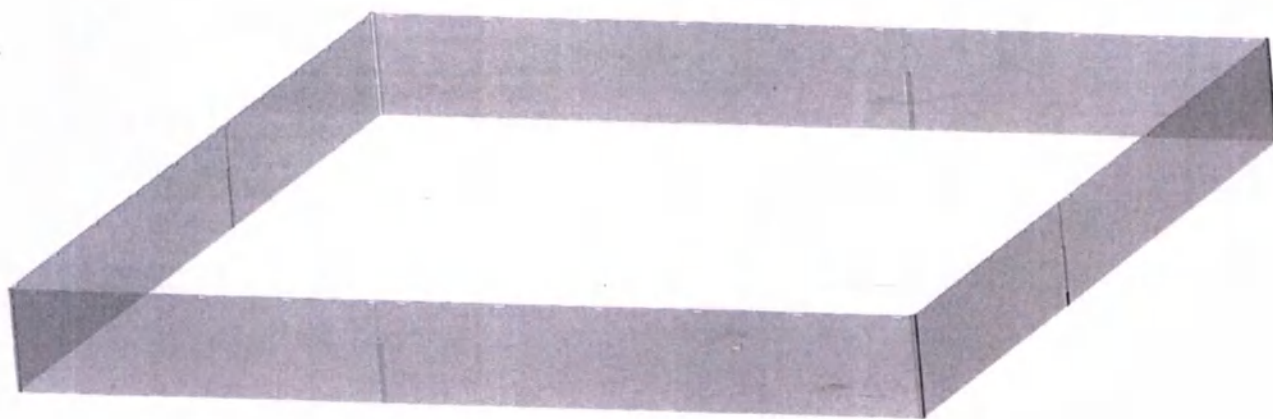


Рис. 14. Установка обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01» с
 воздухораспределителем в вариантах исполнения, по ТУ 32.50.50-002-40178340-2021.
 Макет Маркировки наклейки-шильдика.


Установка обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01» с воздухораспределителем в варианте исполнения ВР/____		
Технические условия:	ТУ 32.50.50-002-40178340-2021	
Рег. удостоверение	№ _____ от _____ г.	
Напряжение питания:	230 (±10%) В~	
Частота:	50-60 Гц	
Мощность:	_____ (+10%) Вт	
Класс защиты от поражения электрическим током - I		
 ООО НПФ "Поток Интер" Россия, 115162, Москва, ул. Хавская, д. 18, корп. 2 Сделано в России post@potok.com www.potok.com	 	 SN ВР/____/____
Сервисный центр 8 (800) 55-00-495		 _____ 202_ г.

Рис. 15. Установка обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01» с
воздухораспределителем в вариантах исполнения, по ТУ 32.50.50-002-40178340-2021.

Макет Маркировки Внешний вид наклейки-шильдика
Пульта дистанционного управления и контроля ПДУК.



Рис. 16. Установка обеззараживания воздуха УОВ «Поток 150-М-01» с
воздухораспределителем в вариантах исполнения, по ТУ 32.50.50-002-40178340-2021.
Макет Маркировки транспортной упаковки.

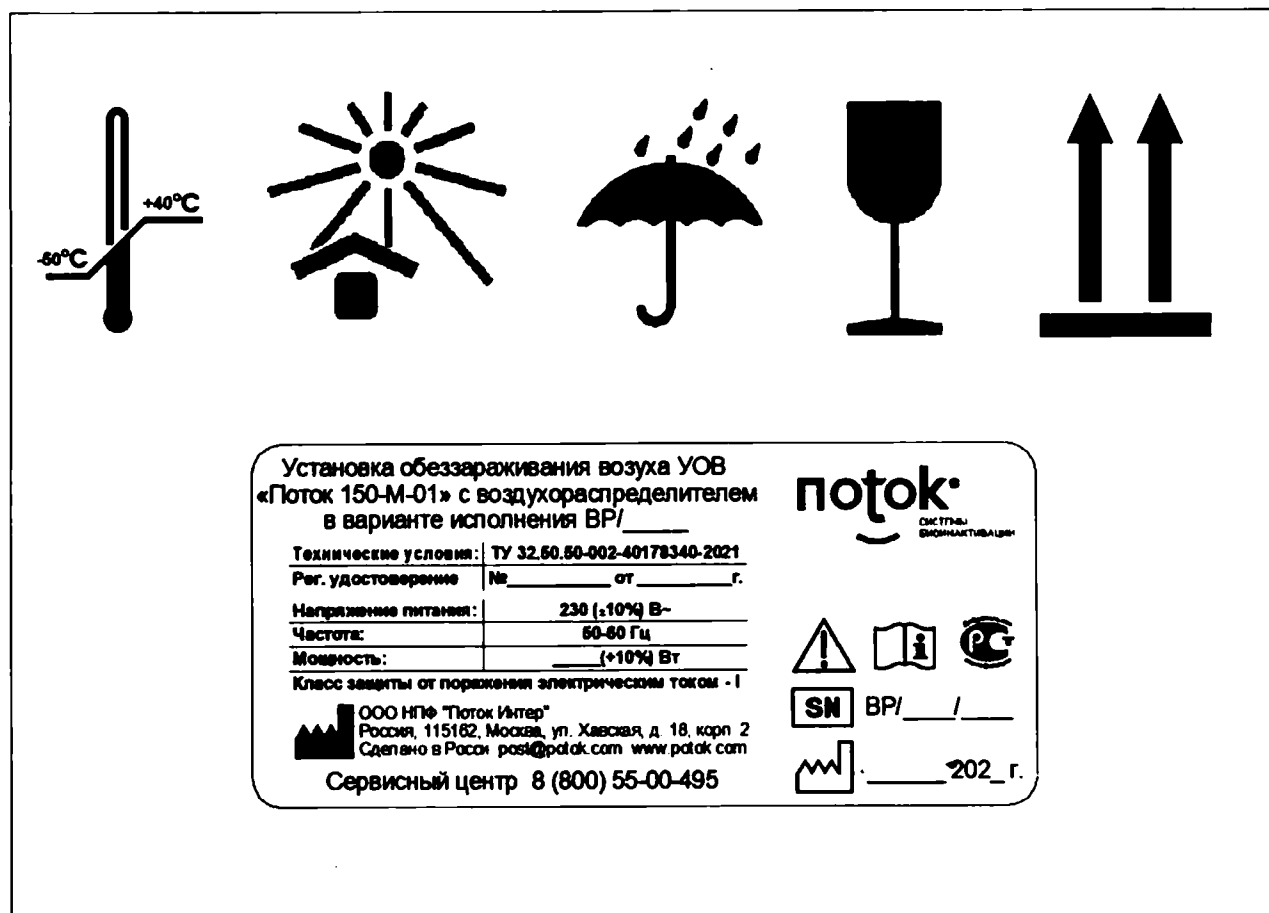

Всего прошито и пронумеровано
19 (двадцать) листов.

Генеральный директор

Ощипков О.В.

