

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий - индивидуальный
предприниматель
ООО «МЕДЛАЙН»



Чернобаев В.В.
20.03.2024 г.

Инструкция по применению
Комплект одежды медицинской
многоразового использования LINESTA®
по

ТУ 14.12.30-002-11903952-2023

г. Омск

2024

Ред.2

Настоящая инструкция по применению распространяется на Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® (далее – изделие). Изделие предназначено для соблюдения требований гигиены, защиты от возможного инфицирования опасными видами инфекции врачей и медицинских сестер и защиты пациента от внутрибольничной и внебольничной инфекции, которую персонал больницы может переносить на своей повседневной одежде.

Условия применения – лечебно-профилактические учреждения широкого профиля.

Область применения – лечебные и лечебно-профилактические медицинские учреждения.

Потенциальные пользователи: медицинские работники.

В зависимости от потенциального риска применения одежда относится к классу 1 риска.

Показания к применению: для соблюдения требований гигиены, защиты от возможного инфицирования опасными видами инфекции врачей и медицинских сестер и защиты пациента от внутрибольничной и внебольничной инфекции, которую персонал больницы может переносить на своей повседневной одежде.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материала.

Побочные эффекты: не выявлены

Меры предосторожности:

Изделия должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов, не должны подвергаться воздействию масел, растворителей и других агрессивных веществ, разрушающих ткань.

Не использовать изделие при наличии видимых дефектов: повреждении поверхности, механических повреждений и т.п.

Длительность и вид контакта:

Кратковременный (менее 24 часов) контакт с неповрежденной кожей.

Производитель

ООО "МедЛайн", 644027, Омская область, г. Омск, ул. Индустриальная 1-я, д. 4, корп. 3, оф. 305

Телефон: 7 (3812) 53-65-37, info@medline-rus.ru

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 2 из 529

Описание изделия

Набор предметов одежды и/или белья, предназначенных для врача при проведении медицинских процедур или для ношения во время нахождения в больнице. Это изделие многоразового использования.

Наименование медицинского изделия:

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023

Размеры изделия по росту и обхвату груди типовой фигуры человека должны соответствовать указанным в табл.1 и 2.

Таблица 1 – Типовые роста женские и мужские

Рост жен., см	Рост муж., см
152-158, 164-170, 176-182	158-164; 170-176; 182-188

Таблица 2 – Размеры изделий для мужчин и женщин

Размеры женские			Размеры мужские		
Размер	Обхват груди, см	Обхват бедер, см	Размер	Обхват груди, см	Обхват бедер, см
40	80	88	44	90	92
42	84	92	46	94	96
44	88	96	48	98	100
46	92	100	50	102	104
48	96	104	52	106	108
50	100	108	54	110	112
52	104	112	56	114	116
54	108	116	58	118	120
56	112	120	60	122	124
58	116	124	62	126	128
60	120	128	64	130	132
62	124	132	66	134	136
64	128	136	68	136	140
66	132	140	70	144	144
68	136	144			
70	140	148			

Для изготовления одежды должны использоваться сырье, материалы и покупные изделия согласно таблице 3.

Таблица 3 – Сырье, материалы и покупные изделия для изготовления одежды

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

1.Ткань готовая сорочечная ТИСИ из синтетических волокон и нитей с вложением хлопковых волокон. с маркировкой «Люкс 120».

Цвет: Белый, Светлая морская волна, Темно-синий, Тёмно-голубой, Светло-серый

Ткань готовая сорочечная ТИСИ из синтетических волокон и нитей с вложением хлопковых волокон, с маркировкой «Люкс 120», в составе: Полиэстер-65 %, Хлопок-35 %;

Варианты красителей:

- Суперконцентрат краситель Белый марки 0;
- Суперконцентрат краситель Светлая морская волна марки #2,
- Суперконцентрат краситель Темно-синий марки #9,
- Суперконцентрат краситель Темно-голубой марки 13,
- Суперконцентрат краситель Светло-серый марки #23.

2. Ткань смешанная (хлопкополиэфирная) «Сатори» (Satory).

Цвет: Белый, Голубой, Темно-синий

Ткань смешанная (хлопкополиэфирная) «Сатори» (Satory), в составе: Полиэфир-50%, Хлопок-50%;

Варианты красителей:

- Суперконцентрат краситель Белый марки White0;
- Суперконцентрат краситель Голубой марки 526;
- Суперконцентрат краситель Темно-синий марки 335,

3. Материалы текстильные одежные из хлопчатобумажных волокон в смеси с синтетическими нитями: ткани для пошива одежды, торговой марки «AYMAN», артикул AV836

Цвет: Красный

Материалы текстильные одежные из хлопчатобумажных волокон в смеси с синтетическими нитями: ткани для пошива одежды, торговой марки «AYMAN», артикул AV836, состав 53% хлопок, 44 % полиэстер, 3 % лайкра.

Варианты красителей:

- Суперконцентрат краситель красный марки 15 RED,

НИТКИ:

Цвет Белый, Темно-синий, Светлая морская волна. Красный, Голубой, Светло-серый

НИТКИ: Gala 40/2. Состав: 100% полиэстер.

Варианты красителей:

- 1.Суперконцентрат краситель Белый марки 301
- 2.Суперконцентрат краситель Темно-синий марки 321,

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 4 из 529

3. Суперконцентрат краситель Светлая морская волна марки 231.
4. Суперконцентрат краситель Красный марки 114.
НИТКИ: Galaktika 40S/2. Состав: 100% полиэстер.
5. Суперконцентрат краситель Голубой марки 264.
НИТКИ: ARTA 40S/2. Состав: 100% полиэстер.
6. Суперконцентрат краситель Светло серый марки 368

ФУРНИТУРА:

МОЛНИИ Состав: Полистирол (тесьма, зубчики, бегунок), металл (зубчики, бегунок). 1. Молния цвет белый, 2. Молния цвет темно синий 3. Молния цвет красный
КНОПКИ, (пряжки, пуговицы, хольнитены, полукольца): материал латунь.
ПУГОВИЦЫ Материал: Полистирол ПСМ-115 по ГОСТ 20282, 1.Перламутр 2.Белая непрозрачная 3.Прозрачная 4.Прозрачная с металлическим ободком
Резинка вязанная
Резинка ткацкая
Тесьма светоотражающая Материал: 100% полиэстер.
Репсовая лента Материал: 100% полиэстер. Варианты красителей: 1.Суперконцентрат краситель Белый марки 301, 2.Суперконцентрат краситель Темно-синий марки 321, 3. Суперконцентрат краситель Светлая морская волна марки 231, 4. Суперконцентрат краситель Красный марки 114. 5. Суперконцентрат краситель Голубой марки 264.
Лента с изображением товарного знака Материал: 100% полиэстер. репсовая лента краситель Белый марки 301, нити Gala 40/2 краситель Красный марки 114.
Контрольная лента Материал: 100% полиэстер.

Изделие и его части могут выполняться в разных цветовых исполнениях, в зависимости от используемого материала.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки должен соответствовать указанному в Таблице 4.

Таблица 4 – Комплект поставки

Наименование	Кол-во
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, женский № 1 в составе:	
Халат медицинский женский. варианты исполнения:	
Халат медицинский женский модель: 101-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 104-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 105-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 106-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 107-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 108-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 109-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 110-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 111-1,	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	
Халат медицинский женский модель: 112-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 113-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 114-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 115-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 116-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 117-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 118-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 119-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 120-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 121-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Халат медицинский женский модель: 122-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 123-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 126-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 127-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 128-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель 128С, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 129-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 130-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 131-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 132-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 134-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Халат медицинский женский модель: 135-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 136-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 137-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 138-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Рост:164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 139-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 140-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 142-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Рост:164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 151-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 159-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 160, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 161, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 9 из 529

Халат медицинский женский модель: 162. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 163. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 165. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 166. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 167. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 168. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 169. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 170. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 171. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 172. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 175. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Халат медицинский женский модель: 176. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 177. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 178. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 1173. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 1174. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 1309. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158; 164-170; 176-182.	1 шт.
Головной убор медицинский, варианты исполнения	
Головной убор медицинский модель 011, Размер: 56-66 или	1 шт.
Головной убор медицинский модель 511, Размеры: 56 – 58, 60-62 или	1 шт.
Головной убор медицинский модель 512, Размеры: 56 – 58, 60-62 или	1 шт.
Головной убор медицинский модель 513, Размеры: 56 – 58, 60-62 или	1 шт.
Головной убор медицинский модель 515, Размеры: 56 – 58, 60-62.	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, женский № 2 в составе:	
Блуза медицинская женская, варианты исполнения:	
Блуза медицинская женская модель: 301Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 302Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 303Б,	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	
Блуза медицинская женская модель: 304Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 305Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 306Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 309Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 310Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 312Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 317Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 320Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 321Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 325Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 12 из 529

Блуза медицинская женская модель: 329Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 330Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 332Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 334Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 335Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 336Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 337Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 339Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 340Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 341Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 342Б.	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 13 из 529

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	
Блуза медицинская женская модель: 343Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 351Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 354Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 355Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 356Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 357-1Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 357-2Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 358Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 358-1Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 359Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA* по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Блуза медицинская женская модель: 360Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 361Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 362Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 363Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 364Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 365Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 366Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 367Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 368Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 369Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 370Б.	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	
Блуза медицинская женская модель: 371Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 372Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 373Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 374Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 375Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 376Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 378Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 379Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 027Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 03-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Рост: 152-158, 164-170, 176-182.	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 16 из 529

Брюки медицинские женские, варианты исполнения:	
Брюки медицинские женские модель: 501, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 503, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 508, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 517, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 519, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 521, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 524, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 525, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 526, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 529, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA* по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 17 из 529

Брюки медицинские женские модель: 532. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182.	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, женский № 3 в составе:	
Блуза медицинская женская модель: 03, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182.	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 03, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182.	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, женский № 4 в составе:	
Блуза медицинская женская модель: 03-5, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182.	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 03-5, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182.	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 03-12, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182.	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 03-12, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182.	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, женский № 6 в составе:	
Халат медицинский женский. варианты исполнения:	
Халат медицинский женский модель: 101-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 18 из 529

Халат медицинский женский модель: 104-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 105-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 106-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 107-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 108-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 109-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 110-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 111-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 112-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 113-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 114-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Халат медицинский женский модель: 115-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 116-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 117-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 118-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 119-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 120-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 121-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 122-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 123-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 126-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 127-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70;	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 20 из 529

Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	
Халат медицинский женский модель: 128-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель 128С, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 129-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 130-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 131-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 132-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 134-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 135-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 136-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 137-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 138-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Рост:164-170 или	
Халат медицинский женский модель: 139-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 140-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 142-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Рост:164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 151-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 159-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 160, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 161, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 162, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 163, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 165, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 166, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Халат медицинский женский модель: 167, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост:164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 168, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 169, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 170, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 171, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 172, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост:164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 175, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 176, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 177, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 178, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 1173, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70;	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 23 из 529

Рост:164-170 или	
Халат медицинский женский модель: 1174, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост:164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 1309, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158; 164-170; 176-182.	1 шт.
Брюки медицинские женские, варианты исполнения:	
Брюки медицинские женские модель: 501, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 503, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 508, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 517, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 519, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 521, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 524, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 525, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.

Брюки медицинские женские модель: 526. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 529. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 532. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182.	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, женский № 7 в составе:	
Халат медицинский женский. варианты исполнения:	
Халат медицинский женский модель: 101-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 104-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 105-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 106-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 107-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 108-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 109-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Халат медицинский женский модель: 110-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 111-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 112-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 113-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 114-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 115-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 116-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 117-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 118-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 119-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 120-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70;	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 26 из 529

Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	
Халат медицинский женский модель: 121-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 122-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 123-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 126-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 127-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 128-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель 128С, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 129-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 130-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 131-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 132-1,	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 27 из 529

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	
Халат медицинский женский модель: 134-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 135-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 136-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 137-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 138-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 139-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 140-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 142-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 151-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 159-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 160,	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	
Халат медицинский женский модель: 161, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 162, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 163, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 165, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 166, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 167, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 168, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 169, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 170, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 171, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 172, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Рост:164-170 или	
Халат медицинский женский модель: 175, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 176, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 177, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 178, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 1173, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост:164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 1174, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост:164-170 или	1 шт.
Халат медицинский женский модель: 1309, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158; 164-170; 176-182.	1 шт.
Брюки медицинские женские, варианты исполнения:	
Брюки медицинские женские модель: 501, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 503, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 508, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 30 из 529

Брюки медицинские женские модель: 517, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 519, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 521, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 524, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 525, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 526, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 529, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Брюки медицинские женские модель: 532, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182.	1 шт.
Блуза медицинская женская, варианты исполнения:	
Блуза медицинская женская модель: 301Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 302Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 303Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70;	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 31 из 529

Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	
Блуза медицинская женская модель: 304Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 305Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 306Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 309Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 310Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 312Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 317Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 320Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 321Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 325Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 32 из 529

Блуза медицинская женская модель: 329Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 330Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 332Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 334Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 335Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 336Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 337Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 339Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 340Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 341Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 342Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70;	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 33 из 529

Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	
Блуза медицинская женская модель: 343Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 351Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 354Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 355Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 356Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 357-1Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 357-2Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 358Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 358-1Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 359Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-
2023, ред.2

Страница 34 из 529

Блуза медицинская женская модель: 360Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 361Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 362Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 363Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 364Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 365Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 366Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 367Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 368Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 369Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 370Б. Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Рост: 164-170 или	
Блуза медицинская женская модель: 371Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 372Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 373Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 374Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 375Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 376Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 378Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 379Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64; Рост: 164-170 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 027Б, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70; Рост: 152-158, 164-170, 176-182 или	1 шт.
Блуза медицинская женская модель: 03-1, Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Рост: 152-158, 164-170, 176-182.	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 36 из 529

Инструкция по применению	1 шт.
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA [®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, мужской № 1 в составе:	
Халат медицинский мужской, варианты исполнения:	
Халат медицинский мужской модель: 201-1, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Халат медицинский мужской модель: 202-1, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Халат медицинский мужской модель: 203-1, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Халат медицинский мужской модель: 204-1, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Халат медицинский мужской модель: 205-1, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Халат медицинский мужской модель: 206, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Рост: 158-164, 170-176, 182-188.	1 шт.
Головной убор медицинский, варианты исполнения:	
Головной убор медицинский модель 011, Размер: 56-66 или	1 шт.
Головной убор медицинский модель 511, Размеры: 56 – 58, 60-62 или	1 шт.
Головной убор медицинский модель 512, Размеры: 56 – 58, 60-62 или	1 шт.
Головной убор медицинский модель 513, Размеры: 56 – 58, 60-62 или	1 шт.
Головной убор медицинский модель 515, Размеры: 56 – 58, 60-62.	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA [®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, мужской № 2 в составе:	
Куртка медицинская мужская, варианты исполнения:	
Куртка медицинская мужская модель: 401К,	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 37 из 529

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	
Куртка медицинская мужская модель: 402К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 403К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 404К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 405К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 407К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 408К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 408-1К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 409К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 411К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост:170-176 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 412К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост:170-176 или	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-
2023, ред.2

Страница 38 из 529

Куртка медицинская мужская модель: 413К. Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 170-176 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 414К. Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Рост: 170-176 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 415К. Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Рост: 170-176 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 416К. Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188	1 шт.
Брюки медицинские мужские, варианты исполнения:	
Брюки медицинские мужские модель: 505, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Брюки медицинские мужские модель: 506, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Брюки медицинские мужские модель: 507, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Брюки медицинские мужские модель: 522, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Брюки медицинские мужские модель: 523, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Брюки медицинские мужские модель: 528, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 39 из 529

Брюки медицинские мужские модель: 530, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Брюки медицинские мужские модель: 531. Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 170-176.	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, мужской № 3 в составе	
Куртка медицинская мужская модель: 03-3, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188	1 шт.
Брюки медицинские мужские модель: 03-3, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, мужской № 4 в составе:	
Куртка медицинская мужская модель: 03-4, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188	1 шт.
Брюки медицинские мужские модель: 03-4, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 03-13. Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188	1 шт.
Брюки медицинские мужские модель: 03-13. Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188.	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, мужской № 6 в составе:	
Халат медицинский мужской, варианты исполнения:	
Халат медицинский мужской модель: 201-1, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Халат медицинский мужской модель: 202-1, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Халат медицинский мужской модель: 203-1, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Халат медицинский мужской модель: 204-1, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Халат медицинский мужской модель: 205-1, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Халат медицинский мужской модель: 206, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Рост: 158-164, 170-176, 182-18.	1 шт.
Брюки медицинские мужские, варианты исполнения:	
Брюки медицинские мужские модель: 505, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Брюки медицинские мужские модель: 506, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Брюки медицинские мужские модель: 507, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Брюки медицинские мужские модель: 522, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Брюки медицинские мужские модель: 523, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Брюки медицинские мужские модель: 528, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70;	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 41 из 529

Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	
Брюки медицинские мужские модель: 530, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Брюки медицинские мужские модель: 531. Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 170-176.	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, мужской № 7 в составе:	
Халат медицинский мужской, варианты исполнения:	
Халат медицинский мужской модель: 201-1, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Халат медицинский мужской модель: 202-1, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Халат медицинский мужской модель: 203-1, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Халат медицинский мужской модель: 204-1, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Халат медицинский мужской модель: 205-1, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Халат медицинский мужской модель: 206, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Рост: 158-164, 170-176, 182-18.	1 шт.
Брюки медицинские мужские, варианты исполнения:	
Брюки медицинские мужские модель: 505, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 42 из 529

Брюки медицинские мужские модель: 506, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Брюки медицинские мужские модель: 507, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Брюки медицинские мужские модель: 522, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Брюки медицинские мужские модель: 523, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Брюки медицинские мужские модель: 528, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Брюки медицинские мужские модель: 530, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Брюки медицинские мужские модель: 531. Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 170-176.	1 шт.
Куртка медицинская мужская, варианты исполнения:	
Куртка медицинская мужская модель: 401К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 402К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 403К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 404К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70;	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 43 из 529

Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	
Куртка медицинская мужская модель: 405К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 407К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 408К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 408-1К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 409К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 411К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост:170-176 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 412К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост:170-176 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 413К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70; Рост: 170-176 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 414К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Рост: 170-176 или	1 шт.
Куртка медицинская мужская модель: 415К, Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Рост: 170-176 или	1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Куртка медицинская мужская модель: 416К. Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; Рост: 158-164, 170-176, 182-188	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

Маркировка

Для маркирования готовых изделий должны применяться:

- товарный ярлык;
- лента с изображением товарного знака;
- контрольная лента.

На товарном ярлыке должно быть указано следующее:

- а) наименование изделия
- б) состав изделия: вариант исполнения - модель, размер, количество, цвет, ткань, состав;
- в) дата изготовления;
- г) наименования производителя;
- д) адрес производителя;
- е) номер и дата регистрационного удостоверения;
- ж) штриховой код товара.

На ленте с изображением товарного знака:

- а) товарный знак;
- б) размер.

На контрольной ленте должно быть указано следующее

- а) товарный знак;
- б) сайт производителя
- в) сырьевой состав материала;
- г) символы по уходу за изделием;
- д) страна производства.

Товарный ярлык должен быть пришит, навешен на изделие или прикреплен к нему другим способом, обеспечивающим его сохранность.

Контрольная лента должна быть вшита в боковой шов (для халатов, курток), в шов притачивания пояса (для юбок, брюк), в шов притачивания доньшка колпака (для головных уборов).

Лента с изображением товарного знака должна быть вшита в середину горловины спинки (для халатов, курток), в шов притачивания пояса (для юбок и брюк), в шов притачивания доньшка колпака (для головных уборов).

Символы по уходу за изделием, состав сырья допускается указывать на отдельной ленте.

Маркировка потребительской упаковки:

- а) наименование изделия
- б) состав изделия: вариант исполнения - модель, размер, количество, цвет, ткань, состав;
- в) дата изготовления;
- г) наименования производителя;
- д) адрес производителя;
- е) номер и дата регистрационного удостоверения;
- ж) штриховой код товара.

Транспортная маркировка.

Транспортная маркировка должна быть нанесена на бумажные или картонные ярлыки, или непосредственно на тару, ярлыки прикрепляют к упаковке клеем или другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки.

На транспортную упаковку допускается наносить следующее:

- а) наименование изделия;
- б) состав изделия: вариант исполнения - модель, размер,
- в) количество потребительских упаковок в транспортной таре;
- г) номер и дата Регистрационного удостоверения
- д) Отправитель - фирменное наименование, местонахождение (адрес) изготовителя;
- е) Получатель (наименование, адрес);.
- ж) Символ «Беречь от влаги»,
- з) Символ «Не допускать воздействия солнечного света».

Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем продукции в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023

	Не допускать воздействия солнечного света		Не допускать воздействия влаги.
---	---	--	---------------------------------

Упаковка

Изделие должно быть упаковано в индивидуальный полиэтиленовый пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 марки М, размером 25*35 см±10%. Изделие в потребительской упаковке должно быть уложено в групповую упаковку (транспортную тару) размером 455*300*240 мм±10%– ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142 или ГОСТ 7933, или иную тару, изготовленную по действующей нормативно-технической документации. Ящики должны быть оклеены лентой по ГОСТ 18251 или ГОСТ 20477.

Эксплуатационная документация должна быть помещена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 или без пакета и уложена в упаковку с изделием.

Допускаются иные способы упаковки, обеспечивающие защиту изделия от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование вместимости транспортных средств и удобство выполнения разгрузочно-погрузочных работ.

Масса брутто транспортной упаковки должна быть не более 25 кг.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Способ применения:

Вскройте упаковку.

Достаньте изделие

Если необходимо, проведите автоклавирование

Наденьте изделие

Рекомендации по уходу:

Перед началом чистки изделия необходимо ознакомиться с изображениями на ярлыке изделия.

Для стирки изделий из цветной ткани и цветным кантом категорически запрещается использование стиральных порошков с отбеливателем.

Гладить изделие нужно только с изнанки, чтобы избежать блеска.

Перед стиркой изделия так же необходимо удостовериться в том, что фурнитура надежно закреплена и не повредилась при носке.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Транспортирование изделия может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны проводиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

При транспортировании самолетом – в отапливаемом герметизированном отсеке.

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности до 100%).

Условия хранения изделия в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °C и относительной влажности до 98%).

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.3684-21.

Изделие, не загрязненное биологической жидкостью после использования, относится к медицинским отходам класса А – эпидемиологически безопасные отходы, согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Изделие, загрязненное биологической жидкостью после использования, относится к медицинским отходам класса Б – эпидемиологически опасные отходы, согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованное изделие так же подлежит утилизации как отходы класса А в случаях:

- окончания срока годности;
- повреждений, свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок годности – 4 года.

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 48 из 529

Срок эксплуатации изделий – 3 года.

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 15150, ГОСТ 15.004, ГОСТ 313999, ГОСТ 31396, ГОСТ 12807, ГОСТ 29122, ГОСТ 242973, ГОСТ Р ИСО 15223-1, ГОСТ 10581, ГОСТ ISO 3758, Серия стандартов ГОСТ ISO 10993.

Общая инструкция по применению для изделия может быть представлена в сопроводительной документации по требованию заказчика.

Объем представленной информации в инструкции, входящей в комплект поставки, достаточен для применения медицинского изделия I класса риска по назначению и такое применение безопасно.

Описание, конструкция и внешний вид изделий.

В1.Халат медицинский женский модель 101-1.

Описание модели

Халат медицинский женский длиной до низа колена; полуприлегающего силуэта, слегка расширенный книзу (расширение=4,0см); с разрезами в боковых швах.

Перед с центральной бортовой застёжкой на 2 пары кнопок в верхней части изделия и 4 отдельных кнопки в нижней части; с рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с двумя верхними накладными карманами, передним боковым срезом входящими в рельефные швы на уровне линии груди; с двумя нижними накладными карманами, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы, а верхний срез оформлен притачной планкой шириной 3,5-3,7см и декоративной патой шириной 3,3-3,5см, одним концом вшитой в рельефный шов, а другим концом пристегивающейся к планке кармана на кнопку. В передней части кармана заложены по два декоративных вертикальных защипа глубиной 0,7-0,8см. Расстояние между защипами 2,0см.

Спинка с рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скрепленными посередине спинке с помощью кнопки. Для регулировки степени прилегания изделия по талии на правом полупоясе должны быть установлены две нижних части кнопки с расстоянием 2,5см.

Рукава втачные, одношовные, длиной $\frac{3}{4}$. Параллельно нижнему краю рукавов застрочен защип глубиной 0,6-0,7см, имитирующий отложные манжеты шириной 3,5-3,6см.

Верхние части переда и спинки, а также декоративные паты карманов могут быть выполнены из отделочной ткани.

По швам настрачивания верхних и нижних карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от шва.

По горловине, краям бортов, рельефам, швам соединения верхней и нижней частей переда и спинки; по верхним краям карманов, швам притачивания планок к карманам; по низу рукавов, патам и полупоясам (со всех сторон) – должна быть проложена отделочная строчка на расстоянии 0,6-0,7см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,1-1,3см.

Варианты размеров:

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

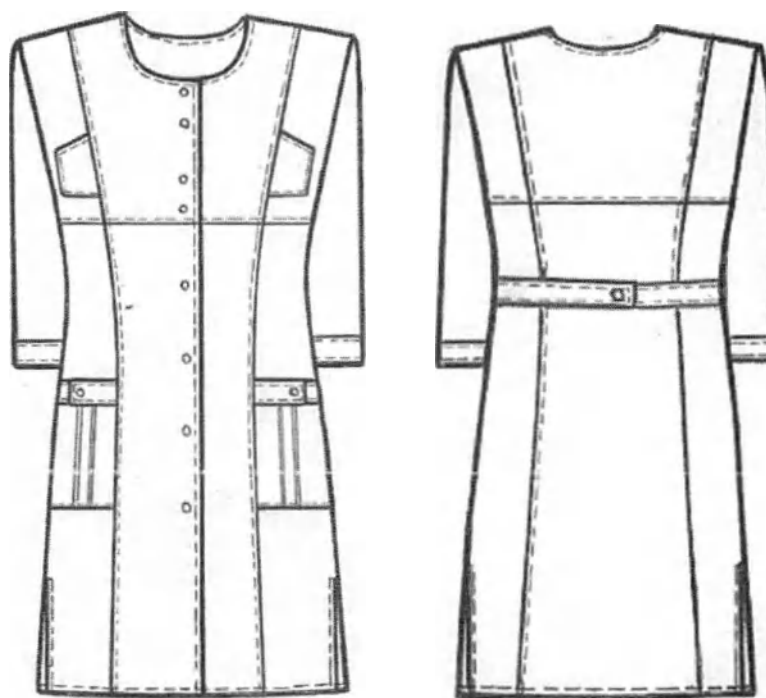


Рисунок В1– Халат медицинский женский модель 101-1

Таблица В1.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 101-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Нижняя часть полочки	2	1
2	Нижняя часть бочка полочки	2	1
3	Нижняя часть спинки	1	0
4	Нижняя часть бочка спинки	2	1
5	Рукав	2	1
6	Нижняя часть подборта	2	1
7	Карман нижний	2	1
8	Планка кармана	2	1
9	Полупояс	2	1
Отделочная ткань			
10	Верхняя часть полочки	2	1
11	Верхняя часть бочка полочки	2	1
12	Верхняя часть спинки	1	0
13	Верхняя часть бочка спинки	2	1
14	Верхний карман	2	1
15	Верхняя часть подборта	2	1
16	Обтачка горловины спинки	1	0
17	Пата нижнего кармана	2	1
Итого		31	14

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Таблица В1.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 101-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	95,7	96,0	96,5	97,0	97,5	97,8	98,1	98,4	(±)1,0
		164-170	101,7	102,0	102,5	103,0	103,5	103,8	104,1	104,4	
		176-182	104,7	105,0	105,5	106,0	106,5	106,8	107,1	107,4	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	98,3	99,0	99,7	100,4	101,1	101,8	102,5	103,3	(±)1,0
		164-170	104,3	105,0	105,7	106,4	107,1	107,8	108,5	109,3	
		176-182	107,3	108,0	108,7	109,4	110,1	110,8	111,5	112,3	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,5	46,5	48,5	50,6	52,7	54,8	56,9	59,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	57,5	59,5	61,6	63,8	65,9	68,0	70,2	72,4	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	40,9	41,1	41,3	41,5	41,7	41,9	42,1	42,3	(±)1,0
		164-170	43,9	44,1	44,3	44,5	44,7	44,9	45,1	45,3	
		176-182	45,4	45,6	45,8	46,0	46,2	46,4	46,6	46,8	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	16,4	17,2	18,0	18,8	19,6	20,4	21,2	22,0	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,7	16,0	16,3	16,5	16,8	17,0	17,3	17,6	(±)0,5
9	Ширина верхнего кармана внизу, см	все роста	8,2	8,2	8,2	8,2	8,3	8,3	8,3	8,5	(±)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,0	12,3	12,3	12,3	12,4	12,4	12,5	12,6	(±)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	13,8	14,5	15,2	15,9	16,6	17,3	18,1	19,0	(±)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	18,2	18,2	18,3	18,5	18,6	18,8	18,8	19,2	(±)0,3

Продолжение Таблицы В1.1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	98,7	99,0	99,3	99,5	99,8	100,0	100,3	100,5	(±)1,0
		164-170	104,7	105,0	105,3	105,5	105,8	106,0	106,3	106,5	
		176-182	107,7	108,0	108,3	108,5	108,8	109,0	109,3	109,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,4	44,3	45,2	46,0	46,8	47,7	48,6	49,5	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	104,1	105,0	105,9	106,8	107,7	108,6	109,5	110,5	(±)1,0
		164-170	110,1	111,0	111,9	112,8	113,7	114,6	115,5	116,5	
		176-182	113,1	114,0	114,9	115,8	116,7	117,6	118,5	119,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	61,1	63,2	65,4	67,6	69,8	72,0	74,2	76,4	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	74,5	76,5	78,6	80,8	83,0	85,2	87,4	89,6	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	42,5	42,7	42,9	43,2	43,4	43,6	43,8	44,0	(±)1,0
		164-170	45,5	45,7	45,9	46,2	46,4	46,6	46,8	47,0	
		176-182	47,0	47,2	47,4	47,7	47,9	48,1	48,3	48,5	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 52 из 529

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22.8	23.5	24.2	24.9	25.5	26.1	26.7	27.3	(+/-)0.5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	17.8	18.1	18.4	18.8	19.2	19.6	20.0	20.5	(+/-)0.5
9	Ширина верхнего кармана внизу, см	все роста	8.6	8.8	8.9	9.0	9.2	9.5	9.8	10.0	(+/-)0.3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12.6	12.7	13.0	13.1	13.2	13.2	13.3	13.4	(+/-)0.3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	19.9	20.9	21.9	22.8	22.0	22.5	22.8	23.2	(+/-) 0.3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	19.2	19.2	19.3	19.4	19.7	19.7	19.7	19.8	(+/-)0.3

В2.Халат медицинский женский модель 104-1.

Описание модели

Халат медицинский женский длиной до середины колена; полуприлегающего силуэта, слегка расширенный книзу (расширение 4,0см).

Перед с центральной бортовой застежкой на 8 парно расположенных обметанных петель и 8 пуговиц; с овальными швами, выходящими из краев борта ниже линии груди и заканчивающимися в нижней части проймы; с четырьмя мягкими складками, заложенными в этих овальных подрезах в области центра груди; с дугообразными швами, выходящими из краев борта на 5,3-5,5см ниже верхних подрезов и заканчивающимися в боковых швах на уровне линии талии; с вертикальными рельефными швами на нижних частях переда, выходящими из нижних подрезов и доходящими до низа; с двумя нижними накладными карманами, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы. Верхние срезы карманов дугообразные и обработаны обтачками.

Спинка с рельефными швами, выходящими из плевых швов и доходящими до низа; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скрепленные посередине спинки с помощью пуговицы.

Рукава втачные, одношовные, короткие (выше локтя), с двумя мягкими складками, заложенными по окату каждого рукава рядом с плечевыми швами.

Воротник на спинке выполнен в виде отрезной стойки шириной 1,9-2,1см, а на перед – в виде цельно выкроенной стойки, плавно переходящей в неглубокий (выше линии груди) V-образный вырез.

По краям бортов, рельефам, подрезам переда, по краю стойки и шву ее втачивания в горловину спинки, по верхним краям карманов и швам их настрачивания должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

По низу рукавов и низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В качестве фурнитуры должны быть использованы пластиковые пуговицы диаметром 1,3-1,5см.

Варианты размеров:

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

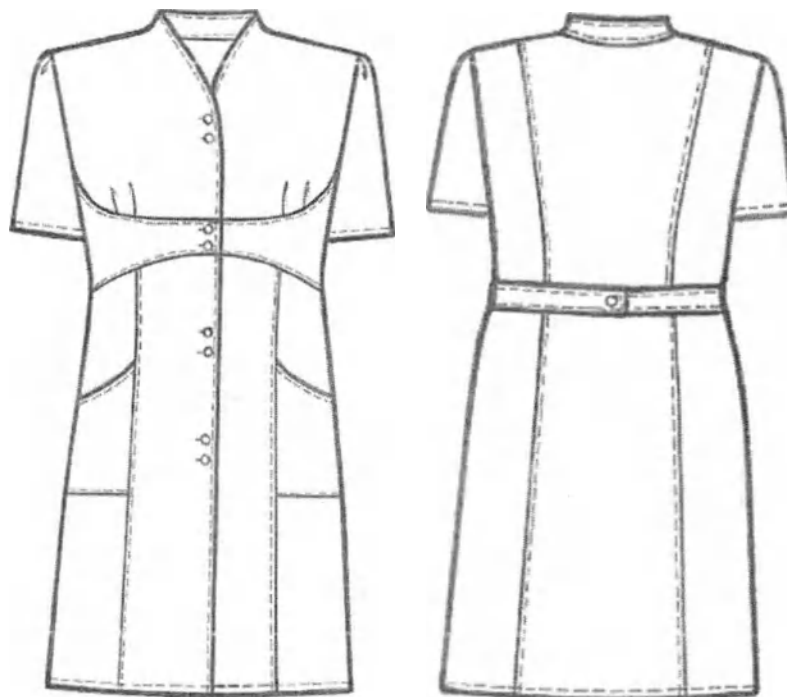


Рисунок В2– Халат медицинский женский модель 104-1

Таблица В2.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 104-

1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Верхняя часть полочки	2	1
2	Средняя часть полочки	2	1
3	Нижняя центральная часть полочки	2	1
4	Нижняя боковая часть полочки	2	1
5	Спинка	1	0
6	Бочок спинки	2	1
7	Рукав	2	1
8	Карман	2	1
9	Полупояс	2	1
10	Воротник	2	1
11	Подборт	2	1
12	Обтачка кармана	2	1
Итого		23	11

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 54 из 529

Таблица В2.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Халат медицинский женский модель 104-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	91,2	91,7	92,2	92,6	93,0	93,4	93,8	94,2	(±)1,0
		164-170	97,2	97,8	98,2	98,6	99,0	99,4	99,8	100,2	
		176-182	100,2	100,8	101,2	101,6	102,0	102,4	102,8	103,2	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	34,0	35,0	36,0	37,0	37,8	38,6	39,4	40,2	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	94,3	95,0	95,6	96,3	97,0	97,6	98,2	98,8	(±)1,0
		164-170	100,3	101,0	101,6	102,3	103,0	103,6	104,2	104,8	
		176-182	103,3	104,0	104,6	105,3	106,0	106,6	107,2	107,8	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	21,2	21,5	21,7	21,9	22,1	22,6	22,9	23,2	(±)0,5
		164-170	23,2	23,5	23,7	23,9	24,1	24,6	24,9	25,2	
		176-182	24,2	24,5	24,7	24,9	25,1	25,6	25,9	26,2	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,3	18	18,7	19,3	20,0	20,8	21,5	22,2	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,4	17,1	17,7	18,3	18,9	19,6	20,2	20,9	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана внизу, см	все роста	16,4	17,3	18,1	18,8	19,5	20,2	21,1	21,9	(±)0,3
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	20,0	20,2	20,5	21,0	21,3	21,5	21,6	21,7	(±)0,3

Продолжение Таблицы В2.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	94,5	94,8	95,1	95,3	95,6	95,9	96,2	96,5	(±)1,0
		164-170	100,5	100,8	101,1	101,3	101,6	101,9	102,2	102,5	
		176-182	103,5	103,8	104,1	104,3	104,6	104,9	105,2	105,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	41,0	41,8	42,6	43,5	44,3	45,2	46,1	47,0	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	99,5	100,2	101,0	101,7	102,5	103,4	104,3	105,2	(±)1,0
		164-170	105,5	106,2	107,0	107,7	108,5	109,4	110,3	111,2	
		176-182	108,5	109,2	110,0	110,7	111,5	112,4	113,3	114,2	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,2	62,4	64,6	66,8	69,0	71,3	73,5	75,8	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	72,3	74,6	76,8	79,0	81,3	83,5	85,8	88,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	23,7	24,1	24,3	24,5	24,8	25,0	25,2	25,5	(±)0,5
		164-170	25,7	26,1	26,3	26,5	26,8	27,0	27,2	27,5	
		176-182	26,7	27,1	27,3	27,5	27,8	28,0	28,2	28,5	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	23	23,7	24,4	25,1	25,7	26,3	26,9	27,5	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	21,6	22,3	23,0	23,7	24,4	25,1	25,8	26,5	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

9	Ширина нижнего кармана внизу, см	все роста	22,7	23,5	24,2	25,0	25,8	26,7	27,5	28,4	(+/-)0,3
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	22,0	22,2	22,2	22,3	22,3	22,5	22,5	22,6	(+/-)0,3

В3.Халат медицинский женский модель 105-1.

Описание модели

Халат медицинский женский длиной до низа колена, полуприлегающего силуэта, слегка расширенный книзу (расширение=4см): с разрезами в боковых швах.

Перед с центральной бортовой комбинированной застежкой до верха: вверху – на 2 кнопки, ниже – супатная, на 6 обметанных петель и 6 пуговиц; с рельефными швами, выходящими из верхней части пройм и доходящими до низа; с двумя боковыми карманами, обработанными в швах дугообразных подрезов на боковых частях переда ниже линии талии. Верхние углы бортов закруглённые.

Спинка с отрезной кокеткой (линия её притачивания – дугообразная), с вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; со средним швом, заканчивающимся шлицей; с декоративным хлястиком, состоящим из двух частей, вшитых одним концом в рельефные швы на уровне линии талии, а другими, закругленными, скреплёнными посередине спинки с помощью кнопки.

Рукава втачные, одношовные, длиной $\frac{3}{4}$, с притачными манжетами шириной 3,8 – 4,0 см. Манжеты посередине рукава разрезные, с закруглёнными углами.

Воротник – стойка с закруглёнными углами, не доходящая до углов борта.

По рельефам, кокетке, краям бортов, воротника, манжет, верхним краям карманов и шву втачивания воротника в горловину должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1 – 0,2 см от края или шва.

От начала супатной застёжки до низа изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 4,0 – 4,5 см от края борта.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3 – 1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,7 – 1,9 см (для застежки) и 1,2 – 1,4 см (для хлястика), а также пластиковые пуговицы диаметром 1,7 – 1,8 см для супатной застёжки.

Варианты размеров:

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 56 из 529

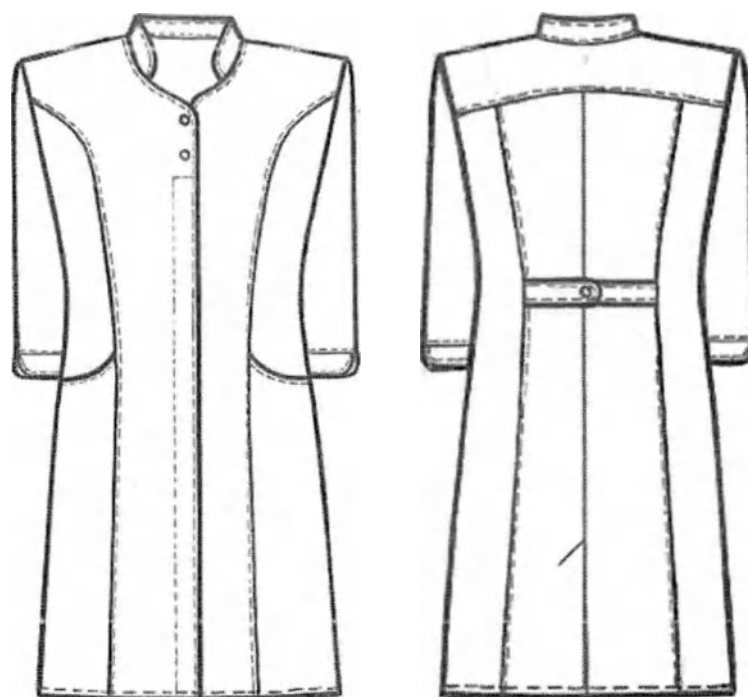


Рисунок В3– Халат медицинский женский модель 105-1

Таблица В3.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 105-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Верхняя часть бочка полочки	2	1
3	Нижняя часть бочка полочки	2	1
4	Спинка	2	1
5	Бочок спинки	2	1
6	Кокетка спинки	1	0
7	Рукав	2	1
8	Манжета	4	2
9	Воротник	2	1
10	Хлястик	4	2
11	Планка супатной застёжки	1	0
12	Мешковина кармана	2	1
13	Подборт	2	1
Итого		28	13

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-
2023, ред.2

Таблица В3.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 105-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	97,0	97,2	97,5	97,8	98,1	98,5	99,1	99,8	(±)1,0
		164-170	103,0	103,2	103,5	103,8	104,1	104,5	105,1	105,8	
		176-182	106,0	106,2	106,5	106,8	107,1	107,5	108,1	108,8	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	36,0	37,0	38,0	39,0	39,8	40,6	41,4	42,2	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	99,2	100,0	100,8	101,6	102,4	103,3	104,2	105,5	(±)1,0
		164-170	105,2	106,0	106,8	107,6	108,4	109,3	110,2	111,5	
		176-182	108,2	109,0	109,8	110,6	111,4	112,3	113,2	114,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,0	46,0	48,0	50,1	52,2	54,4	56,4	58,5	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	69,8	71,6	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	38,2	38,5	38,8	39,2	39,6	40,0	40,4	40,8	(±)1,0
		164-170	41,2	41,5	41,8	42,2	42,6	43,0	43,4	43,8	
		176-182	42,7	43,0	43,3	43,7	44,1	44,5	44,9	45,3	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,1	17,8	18,5	19,2	19,9	20,6	21,4	22,1	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,6	16,0	16,4	16,8	17,2	17,6	18,0	18,4	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	14,2	15,0	15,8	16,5	17,3	18,1	18,8	19,6	(±)0,3
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	23,0	23,0	23,1	23,3	23,5	23,8	24,0	24,5	(±)0,3
11	Длина воротника по отлёту, см	все роста	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	(±)0,5

Продолжение Таблицы В3.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	100,5	101,4	102,3	103,2	104,1	105,0	106,0	107,0	(±)1,0
		164-170	106,5	107,4	108,3	109,2	110,1	111,0	112,0	113,0	
		176-182	109,5	110,4	111,3	112,2	113,1	114,0	115,0	116,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,0	43,7	44,4	45,0	45,5	46,0	46,5	47,0	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	106,9	108,5	110,3	112,1	114,0	116,0	118,0	120,0	(±)1,0
		164-170	112,9	114,5	116,3	118,1	120,0	122,0	124,0	126,0	
		176-182	115,9	117,5	119,3	121,1	123,0	125,0	127,0	129,0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,6	62,7	64,8	66,9	69,0	71,2	73,4	75,6	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	73,4	75,2	77,2	79,0	81,0	83,0	85,0	87,0	(±)1,0

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
6	Длина рукава, см	152-158	41.1	41.4	41.7	42.0	42.2	42.4	42.7	43.0	(±)1.0
		164-170	44.1	44.4	44.7	45.0	45.2	45.4	45.7	46.0	
		176-182	45.6	45.9	46.2	46.5	46.7	46.9	47.2	47.5	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22.9	23.7	24.5	25.3	26.1	26.9	27.7	28.5	(±)0.5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	18.8	19.2	19.6	20.0	20.4	20.8	21.2	21.6	(±)0.5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	20.5	21.5	22.6	23.7	24.8	25.9	27.0	28.0	(±)0.3
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	24.8	24.8	24.9	25.0	25.1	25.2	25.5	25.8	(±)0.3
11	Длина воротника по отлёту, см	все роста	39.8	40.6	41.4	42.2	43.0	43.8	44.6	45.4	(±)0.5

В4. Халат медицинский женский модель 106-1.

Описание модели

Халат медицинский женский укороченный (длиной до колена); полуприлегающего силуэта, слегка расширенный к низу (расширение=4,0см); со съёмным завязывающимся поясом шириной 3,7-3,8см; с декоративными патами шириной 2,9-3,1см, одним концом вшитыми в проймы, а другим концом треугольной формы пристегивающимися к плечевым швам на кнопки (погоны); с разрезами в боковых швах.

Перед с центральной бортовой застежкой до верха на 6 кнопок (левая полочка обработана подбортом, правая – настрочной планкой шириной 3,2-3,4см); с притачными кокетками; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа; с двумя верхними накладными карманами закругленной формы с вертикальными встречными складками (глубиной 1,5см) посередине карманов и притачными планками (шириной 1,7-1,9см) вверх; с двумя нижними накладными карманами закругленной формы с вертикальными встречными складками (глубиной 2,0см) посередине карманов и притачными планками (шириной 2,7-2,9см) вверх.

Спинка с притачной кокеткой, вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с двумя шлевками, настроченными вдоль боковых швов на уровне линии талии.

Рукава втачные, одношовные, длиной до локтя. Параллельно нижнему краю рукавов застрочены двумя строчками (на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8см от края) зашпы, имитирующие отложные манжеты шириной 3,0см.

Воротник стояче-отложной, на отрезной стойке, застегивающейся на одну кнопку.

По рельефам, кокеткам, воротнику, краям бортов, шву настрачивания планки под застежку, низу рукавов, погонам и поясу должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см от края или шва.

По шву притачивания стойки к воротнику, шву втачивания стойки в горловину по разрезам, краям шлевок и швам их настрачивания, по швам притачивания планок верхних

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA¹ по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

и нижних карманов, по сгибам складок и швам настрачивания верхних и нижних карманов - должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,1-1,3см.

Варианты размеров:

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.



Рисунок В4 – Халат медицинский женский модель 106-1

Таблица В4.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 106-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Кокетка полочки	2	1
4	Спинка	1	0
5	Бочок спинки	2	1
6	Кокетка спинки	1	0
7	Планка застёжки	2	1
8	Верхний карман	2	1
9	Планка верхнего кармана	2	1
10	Нижний карман	2	1
11	Планка нижнего кармана	2	1

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
12	Рукав	2	1
13	Воротник	2	1
14	Стойка воротника	2	1
15	Пояс	2	1
16	Погон	4	2
17	Шлёвки	1	0
Итого		33	15

Таблица В4.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 106-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	90,0	90,4	90,9	91,4	91,9	92,4	92,7	93,0	(±)1,0
		164-170	96,0	96,4	96,9	97,4	97,9	98,4	98,7	99,0	
		176-182	99,0	99,4	99,9	100,4	100,9	101,4	101,7	102,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,4	42,2	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа , см	152-158	92,4	93,3	94,0	94,8	95,6	96,4	97,2	98,0	(±)1,0
		164-170	98,4	99,3	100,0	100,8	101,6	102,4	103,2	104,0	
		176-182	101,4	102,3	103,0	103,8	104,6	105,4	106,2	107,0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы , см	все роста	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки) , см	все роста	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	28,4	28,7	29,0	29,3	29,6	29,9	30,2	30,5	(±)1,0
		164-170	30,4	30,7	31,0	31,3	31,6	31,9	32,2	32,5	
		176-182	31,4	31,7	32,0	32,3	32,6	32,9	33,2	33,5	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,1	17,8	18,5	19,1	19,8	20,6	21,3	22,0	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,2	(±)0,5
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	9,1	9,1	9,1	9,9	9,9	9,9	10,9	10,9	(±)0,3
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	все роста	9,9	9,9	9,9	10,0	10	10	10,6	10,6	(±)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	14,3	15,2	15,2	16,0	16,0	16,0	17,8	17,8	(±)0,3
12	Глубина нижнего кармана , см	все роста	16,3	16,3	16,3	16,6	16,6	16,6	17,5	17,5	(±)0,3
13	Длина воротника по отлёту, см	все роста	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0	(±)0,5

Продолжение Таблицы В4.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	93,3	93,6	93,9	94,3	94,6	94,9	95,2	95,5	(±)1,0
		164-170	99,3	99,6	99,9	100,3	100,6	100,9	101,2	101,5	
		176-182	102,3	102,6	102,9	103,3	103,6	103,9	104,2	104,5	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,0	43,8	44,5	45,3	46,0	46,8	47,6	48,4	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	98,8	99,5	100,5	101,4	102,3	103,2	104,1	105,0	(±)1,0
		164-170	104,8	105,6	106,5	107,4	108,3	109,2	110,1	111,0	
		176-182	107,8	108,6	109,5	110,4	111,3	112,2	113,1	114,0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,0	62,0	64,0	66,2	68,4	70,6	72,8	75,0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	73,0	75,0	77,0	79,2	81,4	83,6	85,8	88,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	30,8	31,1	31,4	31,7	32,0	32,3	32,6	32,9	(±)1,0
		164-170	32,8	33,1	33,4	33,7	34,0	34,3	34,6	34,9	
		176-182	33,8	34,1	34,4	34,7	35,0	35,3	35,6	35,9	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,8	23,5	24,2	24,9	25,5	26,1	26,7	27,3	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	21,0	21,7	22,3	23,0	23,6	24,2	24,9	25,5	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	10,9	11,9	11,9	11,9	11,9	12,5	12,5	12,5	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	все роста	10,6	11,1	11,1	11,1	11,1	12,0	12,0	12,0	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	17,8	19,3	19,3	20,0	20,0	21,0	21,0	21,0	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	17,5	18,4	18,4	19,0	19,0	20,0	20,0	20,0	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлёту, см	все роста	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0	(+/-)0,5

В5. Халат медицинский женский модель 107-1.

Описание модели

Халат медицинский женский длиной до низа колен; полуприлегающего силуэта, слегка расширенный книзу (расширение 4,0 см); с разрезами в боковых швах.

Перед с центральной бортовой застёжкой на 6 кнопок; с рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с треугольной декоративной деталью, одна сторона которой вшита в рельефный шов левой полочки выше линии груди, а угол крепится к изделию с помощью металлического хольнитена; с двумя нижними накладными карманами, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы. Нижние края карманов – наклонные, а передние края оформлены треугольными декоративными деталями, одна сторона которых входит в рельефные швы вместе с карманами, а свободные углы крепятся к подгибке карманов с помощью металлических хольнитенов.

Спинка с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скреплёнными посередине спинки с помощью кнопки. Верхний

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

(левый) полупояс расширяется к середине спинки и в месте скрепления шире на 2,5 см, чем нижний (правый). Для регулировки степени прилегания изделия по талии на правом полупоясе должны быть установлены 2 нижние части кнопки с расстоянием 2,5 см.

Рукава втачные, одношовные, короткие (длиной выше локтя), с притачными отложными манжетами шириной 3,4 – 3,6 см.

Воротник стояче – отложной, на цельно выкроенной стойке.

По рельефам, краям бортов, воротника, полупоясов, декоративных деталей и разрезов, по швам настрачивания карманов и втачивания воротника в горловину должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1 – 0,2 см от края или шва.

По верхним краям карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,8 – 2,0 см.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3 – 1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,1 – 1,3 см и металлические хольнитены диаметром 0,5 – 0,6 см.

Варианты размеров:

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.



Рисунок В5– Халат медицинский женский модель 107-1

Таблица В5.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 107-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	1	0
4	Бочок спинки	2	1
5	Рукав	2	1
6	Карман	2	1
7	Декоративная вставка кармана	2	1
8	Отворот рукава	2	1
9	Воротник	2	1
10	Декоративная деталь полочки	1	0
11	Подборт	2	1
12	Левый полупояс	1	0
13	Правый полупояс	1	0
Итого:		22	9

Таблица В5.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 107-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	96,0	96,5	97,0	97,5	98,0	98,5	98,9	99,3	(±) 1,0
		164-170	102,0	102,5	103,0	103,5	104,0	104,5	104,9	105,3	
		176-182	105,0	105,5	106,0	106,5	107,0	107,5	107,9	108,3	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	40,9	41,8	42,7	(±) 0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	98,4	99,3	100,2	101,1	102,0	102,9	104,0	105,0	(±) 1,0
		164-170	104,4	105,3	106,2	107,1	108,0	108,9	110,0	111,0	
		176-182	107,4	108,3	109,2	110,1	111,0	111,9	113,0	114,0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,5	46,5	48,5	50,7	52,8	54,9	57,0	59,0	(±) 1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	55,0	57,2	59,4	61,8	64,0	66,2	68,4	70,5	(±) 1,0
6	Длина рукава, см	152-158	24,3	24,5	24,7	24,9	25,2	25,4	25,6	25,8	(±) 0,5
		164-170	26,3	26,5	26,7	26,9	27,2	27,4	27,6	27,8	
		176-182	27,3	27,5	27,7	27,9	28,2	28,4	28,6	28,8	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,3	18	18,7	19,3	20,0	20,8	21,5	22,2	(±) 0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,0	16,7	17,3	17,9	18,5	19,1	19,7	20,3	(±) 0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	13,5	14,2	15,0	15,7	16,5	17,3	18,1	18,9	(±) 0,3
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	20,2	20,2	20,2	20,5	20,5	20,8	21,0	21	(±) 0,5
11	Длина воротника по отлёту, см	все роста	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0	55,0	(±) 0,5

Продолжение Таблицы В5.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	99,7	100,1	100,5	100,9	101,3	101,7	102,1	102,5	(±) 1,0
		164-170	105,7	106,1	106,5	106,9	107,3	107,7	108,1	108,5	
		176-182	108,7	109,1	109,5	109,9	110,3	110,7	111,1	111,5	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,6	44,5	45,4	46,3	47,2	48,1	49,0	49,9	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	106,1 112,1 115,1	107,2 113,2 116,2	108,3 114,3 117,3	109,4 115,4 118,4	110,5 116,5 119,5	111,5 117,5 120,5	112,5 118,5 121,5	113,5 119,5 122,5	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	61,2	63,4	65,6	67,8	70,0	72,2	74,4	76,6	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	72,7	74,9	77,1	79,3	81,5	83,5	85,5	87,5	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	26,1 28,1 29,1	26,4 28,4 29,4	26,7 28,7 29,7	27,0 29,0 30,0	27,3 29,3 30,3	27,7 29,7 30,7	28,0 30,0 31,0	28,3 30,3 31,3	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	23	23,7	24,4	25,1	25,8	26,5	27,2	27,9	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	20,8	21,3	21,9	22,5	23,1	23,7	24,3	24,9	(+/-)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	19,7	20,3	21,0	21,0	21,0	21,0	21,3	21,5	(+/-)0,3
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	21,0	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	(+/-)0,5
11	Длина воротника по отлёту, см	все роста	56,0	56,8	57,6	58,4	59,2	60,0	60,8	61,6	(+/-)0,5

В6. Халат медицинский женский модель 108-1.

Описание модели

Халат медицинский женский длиной ниже колена; полуприлегающего силуэта, слегка расширенный книзу (расширение 4,0см); с разрезами в боковых швах.

Перед с отложными лацканами до линии груди, с центральной бортовой застёжкой на 5 обметанных петель и 5 пуговиц; с рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с двумя верхними накладными карманами, входящими передними боковыми срезами в рельефные швы на уровне линии груди; с двумя нижними накладными карманами, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы, а также двумя дополнительными накладными карманами закругленной формы, расположенными ниже основных на 5,8-6,0см, заходящих вперед за рельефный шов на 1,4-1,6см. В углах основных и дополнительных нижних накладных карманов должны быть установлены металлические хольнитены.

Спинка с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с декоративным хлястиком шириной 3,7-3,9см, вшитым в рельефные швы на уровне линии талии.

Рукава втачные, одношовные, длинные, с притачными манжетами, разрезными посередине рукава. Над разрезом манжет на рукавах должны быть установлены металлические хольнитены.

Воротник – отложной, «пиджачного» типа с закругленными углами.

По краям бортов, манжет, воротника, по рельефам, шву втачивания воротника в горловину, разрезам, швам настрочивания карманов и притачивания манжет, верхнему и

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

нижнему краю хлястика должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

По верхним краям карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,9-2,1см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические хольнитены диаметром 0,5-0,6см и пластиковые пуговицы диаметром 1,7-1,9см.

Варианты размеров:

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

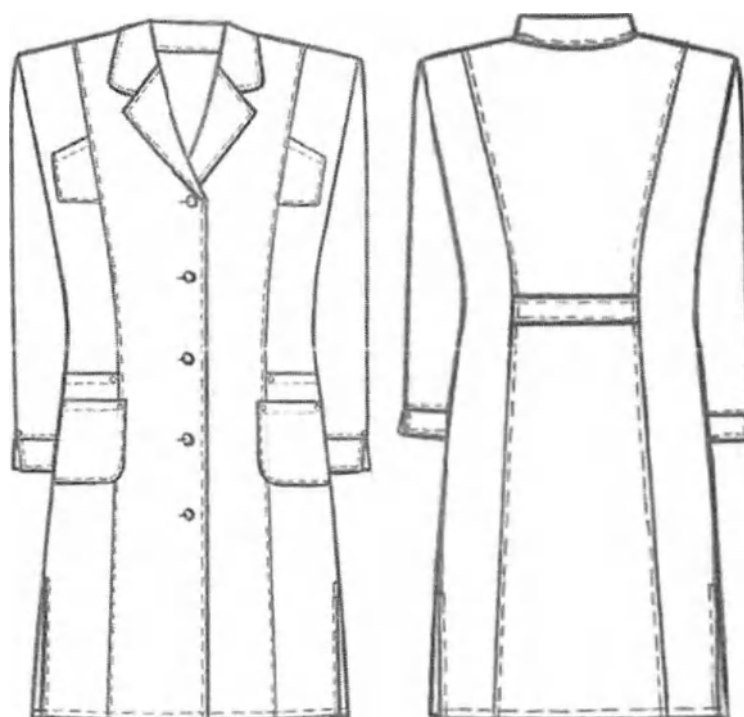


Рисунок В6– Халат медицинский женский модель 108-1

Таблица В6.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 108-

1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	1	0
4	Бочок спинки	2	1
5	Рукав	2	1
6	Верхний карман	2	1
7	Нижний карман основной	2	1

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

8	Нижний карман дополнительный	2	1
9	Манжета	2	1
10	Хлястик	1	0
11	Воротник	2	1
12	Подборт	2	1
Итого:		22	10

Таблица В6.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 108-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	96,0 102,0 105,0	96,5 102,5 105,5	97,0 103,0 106,0	97,5 103,5 106,5	98,0 104,0 107,0	98,4 104,4 107,4	98,7 104,7 107,7	99,0 105,0 108,0	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	98,4 104,4 107,4	99,3 105,3 108,3	100,0 106,0 109,0	100,8 106,8 109,8	101,7 107,7 110,7	102,6 108,6 111,6	103,5 109,5 112,5	104,5 110,5 113,5	(+/-)0,1
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5	71,5	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	56,2 60,2 62,2	56,3 60,3 62,3	56,5 60,5 62,5	56,7 60,7 62,7	56,8 60,8 62,8	56,9 60,9 62,9	57,0 61,0 63,0	57,2 61,2 63,2	(+/-)1,0
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,1	17,8	18,5	19,1	19,8	20,6	21,3	22	(+/-)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	13,5	13,8	14,0	14,3	14,6	14,8	15,1	15,3	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	8,1	8,1	8,2	8,2	8,3	8,4	8,5	8,5	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,3	12,3	12,4	12,4	12,4	12,5	12,5	12,6	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	13,7	14,4	15,1	15,9	16,7	17,5	18,3	19,1	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	18,3	18,3	18,3	18,5	18,7	18,8	18,8	19,0	(+/-)0,3
13	Ширина дополнительного нижнего кармана, см	все роста	12,6	12,6	12,6	14,3	14,3	14,3	14,3	15,6	(+/-)0,3
14	Глубина дополнительного нижнего кармана	все роста	13,9	13,9	13,9	14,5	14,5	14,5	14,5	14,7	(+/-)0,3
15	Длина воротника по отлёту, см	все роста	39,7	40,7	41,7	42,7	43,7	44,7	45,6	46,5	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В6.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	99,3 105,3 108,3	99,5 105,5 108,5	99,7 105,7 108,7	100,0 106,0 109,0	100,3 106,3 109,3	100,5 106,5 109,5	100,7 106,7 109,7	101,0 107,0 110,0	(+/-)1,0

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,4	44,3	45,2	46,0	46,8	47,7	48,6	49,5	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	105,4	106,3	107,2	108,1	109,0	109,8	110,7	111,6	(+/ -)0,1
		164-170	111,4	112,3	113,2	114,1	115,0	115,8	116,7	117,6	
		176-182	114,4	115,3	116,2	117,1	118,0	118,8	119,7	120,6	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,7	63,0	65,2	67,6	70,0	72,4	74,8	77	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	73,5	75,5	77,5	79,5	81,5	83,5	85,5	87,5	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	57,3	57,4	57,4	57,5	57,6	57,8	58,0	58,2	(+/ -)1,0
		164-170	61,3	61,4	61,4	61,5	61,6	61,8	62,0	62,2	
		176-182	63,3	63,4	63,4	63,5	63,6	63,8	64,0	64,2	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,8	23,5	24,2	24,9	25,5	26,1	26,7	27,3	(+/-)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,6	15,9	16,2	16,4	16,6	16,8	17,0	17,3	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	8,6	8,6	8,7	8,7	8,8	9,0	9,3	9,8	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,6	12,7	12,8	12,9	13,0	13,0	13,1	13,1	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	19,9	20,7	21,4	21,0	21,0	21,2	21,6	22,2	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	19,0	19,0	19,2	19,2	19,2	19,4	19,4	19,4	(+/-)0,3
13	Ширина дополнительного нижнего кармана, см	все роста	15,6	15,6	15,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	(+/-)0,3
14	Глубина дополнительного нижнего кармана	все роста	14,7	14,7	14,7	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	(+/-)0,3
15	Длина воротника по отлёту, см	все роста	47,4	48,3	49,2	50,1	51	51,9	52,8	53,7	(+/-)0,5

В7.Халат медицинский женский модель 109-1.

Описание модели

Халат медицинский женский длиной до середины колена; полуприлегающего силуэта, слегка расширенный книзу (расширение 5,5см), с разрезами в боковых швах; без воротника с фигурным вырезом горловины, обработанным обтачкой.

Перед с центральной бортовой застёжкой на шесть обмётанных петель и шесть пуговиц; с притачными наклонными кокетками; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа; с двумя верхними и двумя нижними фигурными накладными карманами. На каждом кармане застрочено по четыре вертикальных веерно расходящихся книзу защипа глубиной 0,1 – 0,2 см.

Спинка с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы и завязывающимися посередине спинки.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA* по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Рукава втачные, одношовные, короткие, зауженные книзу. Низ рукавов обработан обтачкой.

По кокеткам, рельефам, горловине, краям бортов, швам настрачивания карманов, поясам и разрезам должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1 – 0,2 см от края или шва.

По низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,3 – 2,5 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3 – 1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы пластиковые пуговицы диаметром 1,7 -1,9 см.

Варианты размеров:

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

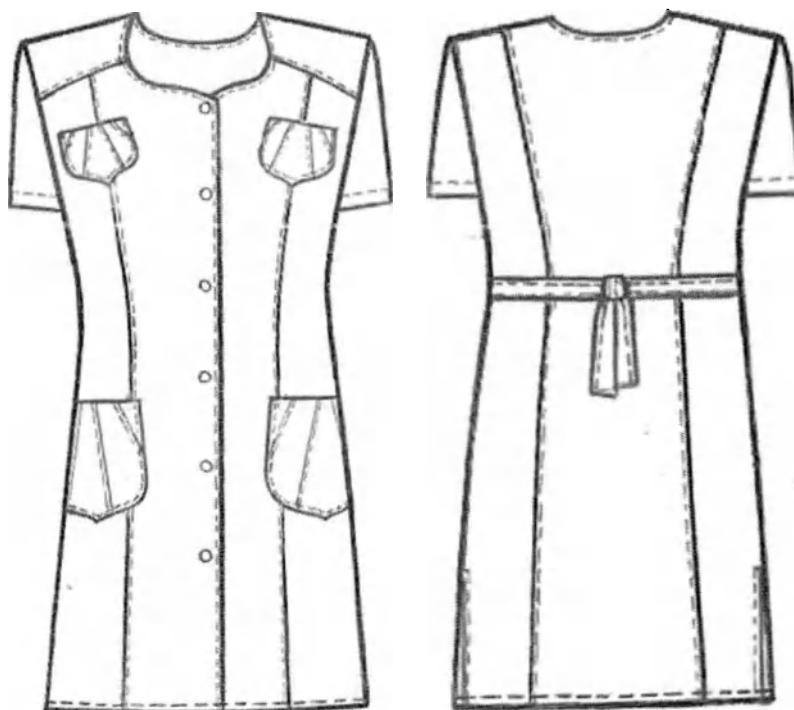


Рисунок В7– Халат медицинский женский модель 109-1

Таблица В7.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 109-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Кокетка полочки	2	1
4	Спинка	1	0

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
5	Бочок спинки	2	1
6	Рукав	2	1
7	Верхний карман	2	1
8	Нижний карман	2	1
9	Подборт	2	1
10	Обтачка низа рукава	2	1
11	Обтачка горловины спинки	1	0
12	Обтачка верхнего кармана	2	1
13	Обтачка нижнего кармана	2	1
Итого:		24	11

Таблица В7.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 109-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	91.4 97.4 100.4	91.8 97.8 100.8	92.2 98.2 101.2	92.7 98.7 101.7	93.2 99.2 102.2	93.6 99.6 102.6	94.0 100.0 103.0	94.4 100.4 103.4	(+/-)1.0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	(+/-)0.5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	93.2 99.2 102.2	94.0 100.0 103.0	94.8 100.8 103.8	95.7 101.7 104.7	96.6 102.6 105.6	97.4 103.4 106.4	98.3 104.3 107.3	99.1 105.1 108.1	(+/-)1.0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	45.0	47.0	49.0	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	(+/-)1.0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	58.0	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	72.0	(+/-)1.0
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	15.2 17.2 18.2	15.3 17.3 18.3	15.5 17.5 18.5	15.8 17.8 18.8	16.0 18.0 19.0	16.3 18.3 19.3	16.7 18.7 19.7	17.0 19.0 20.0	(+/-)1.0
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	15.2	16	16.8	17.5	18.3	19.2	20.1	20.8	(+/-)0.5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	14.2	14.7	15.2	15.7	16.7	17.7	18.7	19.7	(+/-)0.5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	9.3	9.3	9.3	9.7	9.7	10.4	10.4	10.4	(+/-)0.3
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	все роста	11.0	11.0	11.0	11.3	11.3	11.6	11.6	11.6	(+/-)0.3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	16.0	16.0	16.0	17.0	17.0	17.6	17.6	17.6	(+/-)0.3
12	Глубина нижнего кармана посередине, см	все роста	19.7	19.7	19.7	20.0	20.0	21.0	21.0	21.0	(+/-)0.3

Продолжение Таблицы В7.2

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 70 из 529

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	94.8	95.0	95.3	95.6	96.0	96.4	96.8	97.2	(±)1.0
		164-170	100.8	101.0	101.3	101.6	102.0	102.4	102.8	103.2	
		176-182	103.8	104.0	104.3	104.6	105.0	105.4	105.8	106.2	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	(±)0.5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	99.9	100.9	101.8	102.7	103.6	104.5	105.4	106.3	(±)1.0
		164-170	105.9	106.9	107.8	108.7	109.6	110.5	111.4	112.3	
		176-182	108.9	109.9	110.8	111.7	112.6	113.5	114.4	115.3	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	61.0	63.2	65.4	67.6	69.8	72.0	74.2	76.4	(±)1.0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	74.0	76.3	78.6	80.9	83.2	85.5	87.7	90	(±)1.0
6	Длина рукава, см	152-158	18.0	18.8	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	(±)1.0
		164-170	20.0	20.8	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	
		176-182	21.0	21.8	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22	23.0	24	24.9	25.7	26.4	27.2	28.0	(±)0.5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	20.7	21.5	22.2	22.9	23.6	24.3	25.0	25.7	(±)0.5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	10.4	11.0	11.0	11.0	11.5	11.5	12.0	12.0	(±)0.3
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	все роста	11.6	11.7	11.7	11.7	12.0	12	12.2	12.2	(±)0.3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	17.6	18.6	18.6	18.6	19.6	19.6	20.0	20.0	(±)0.3
12	Глубина нижнего кармана посередине, см	все роста	21.0	21.2	21.2	21.2	21.5	21.5	21.8	21.8	(±)0.3

В8. Халат медицинский женский модель 110-1.

Описание модели

Халат медицинский женский укороченный (длиной до середины бедра); полуприлегающего силуэта, слегка расширенный книзу (расширение-3,0 см), с разрезами в боковых швах.

Перед с центральной бортовой застёжкой до верха на 12 парно расположенных кнопок; отрезной по линии талии; с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до шва соединения верхней и нижней частей переда, с двумя верхними накладными карманами, передние срезы которых входят в рельефные швы на уровне линии груди, а верхние края имеют дугообразную форму и обработаны обтачками; с двумя боковыми накладными карманами, задние срезы которых входят в боковые швы, а верхний край частично входит в шов соединения верхней и нижней частей переда. Входы в карман закруглённые, выходят из шва соединения верхней и нижней частей переда и заканчиваются в боковых швах. Над карманами в шов соединения верхней и нижней частей

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 71 из 529

переда вшиты 2 декоративные паты шириной 3,5 – 3,7 см свободным концом треугольной формы прикрепляющиеся к карманам с помощью кнопок.

Спинка с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с двумя декоративными патами шириной 3,5 – 3,7 см, вшитыми одним концом в рельефные швы на уровне линии талии, а другим концом треугольной формы прикрепляющиеся к средней части спинки с помощью кнопок.

Рукава втачные, одношовные, короткие (длиной выше локтя), с притачными отложными манжетами шириной 3,3 – 3,5 см и декоративными патами шириной 3,2 – 3,7 см, вшитыми одним концом в шов притачивания манжет посередине рукавов, а другим концом треугольной формы прикрепляющиеся к рукаву с помощью кнопок.

По рельефам, краям бортов, воротника, пат, манжет, по горловине переда, шву соединения верхней и нижней его частей, по верхним краям и швам настрачивания верхних и нижних карманов должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1 – 0,2 и 0,7 – 0,8 см от края или шва.

По разрезам и шву втачивания воротника в горловину спинки должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1 – 0,2 см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3 – 1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,1 – 1,3 см.

Варианты размеров:

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.



Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 72 из 529

Рисунок В8– Халат медицинский женский модель 110-1

Таблица В8.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 110-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Верхняя часть полочки	2	1
2	Верхняя часть бочка полочки	2	1
3	Нижняя часть полочки	2	1
4	Спинка	1	0
5	Бочок спинки	2	1
6	Рукав	2	1
7	Верхний карман	2	1
8	Нижний карман	2	1
9	Отворот рукава	2	1
10	Подборт	2	1
11	Обтачка верхнего кармана	2	1
12	Обтачка нижнего кармана	2	1
13	Пата декоративная	12	6
14	Воротник	2	1
Намелки			
Итого		37	18

Таблица В8.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 110-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	80,4	80,9	81,5	82,0	82,4	82,8	83,2	83,6	(+/-)1,0
		164-170	86,4	86,9	87,5	88,0	88,4	88,8	89,2	89,6	
		176-182	89,4	89,9	90,5	91,0	91,4	91,8	92,2	92,6	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	34,5	35,7	36,8	38,0	39,2	40,5	41,5	42,5	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	83,4	84,3	85,0	85,8	86,7	87,6	88,5	89,5	(+/-)1,0
		164-170	89,4	90,3	91,0	91,8	92,7	93,6	94,5	95,5	
		176-182	92,4	93,3	94,0	94,8	95,7	96,6	97,5	98,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	23,3	23,7	24,1	24,5	24,7	25,0	25,2	25,4	(+/-)0,5
		164-170	25,3	25,7	26,1	26,5	26,7	27,0	27,2	27,4	
		176-182	26,3	26,7	27,1	27,5	27,7	28,0	28,2	28,4	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,2	17,8	18,5	19,1	19,8	20,6	21,3	22,0	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,0	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0	19,6	20,2	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,5	8,8	9,0	(+/-)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 73 из 529

10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	10,8	11,0	11,3	11,5	11,7	12	12,2	12,4	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по нижнему краю, см	все роста	16,5	17,3	18,1	18,9	19,7	20,5	21,2	21,9	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	24,8	25,0	25,1	25,2	25,3	25,5	25,6	25,7	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлёту, см	все роста	35,6	36,7	37,8	38,9	40,0	41,0	42,0	43,0	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В8.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	83,8	84,0	84,2	84,5	84,8	85,0	85,3	85,5	(+/-)1,0
		164-170	89,8	90,0	90,2	90,5	90,8	91,0	91,3	91,5	
		176-182	92,8	93,0	93,2	93,5	93,8	94,0	94,3	94,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,5	44,4	45,3	46,2	47,1	48,0	48,9	49,8	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	90,4	91,3	92,2	93,1	94,0	94,8	95,7	96,6	(+/-)1,0
		164-170	96,4	97,3	98,2	99,1	100,0	100,8	101,7	102,6	
		176-182	99,4	100,3	101,2	102,1	103,0	103,8	104,7	105,6	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,2	62,4	64,6	66,8	69,0	71,3	73,5	75,8	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	70,2	72,4	74,6	76,8	79,0	81,3	83,5	85,8	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	25,8	26,1	26,4	26,6	26,9	27,2	27,4	27,7	(+/-)0,5
		164-170	27,8	28,1	28,4	28,6	28,9	29,2	29,4	29,7	
		176-182	28,8	29,1	29,4	29,6	29,9	30,2	30,4	30,7	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,8	23,5	24,2	24,9	25,5	26,1	26,7	27,3	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	20,8	21,4	22,0	22,6	23,2	23,8	24,4	25	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	9,2	9,5	9,7	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,5	12,6	12,8	13,0	13,2	13,3	13,4	13,6	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по нижнему краю, см	все роста	22,6	23,3	24	24,7	25,4	26,1	26,8	27,5	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	25,8	25,9	26,0	26,0	26,1	26,2	26,3	26,3	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлёту, см	все роста	44,0	45,0	46,0	47,00	48,00	49,0	50,0	51,0	(+/-)0,5

В9. Халат медицинский женский модель 111-1.

Описание модели

Халат медицинский женский укороченный (длиной до середины бедра); полуприлегающего силуэта, слегка расширенный книзу (расширение-3,0 см), с притачной кокеткой, на спине выше уровня лопаток, а на передё шириной 4 см; с разрезами в боковых швах; без воротника, с фигурным вырезом горловины, обработанным обтачкой.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Перед с центральной бортовой застёжкой на 6 кнопок; с декоративной патой, шириной 2,8 – 3,0 см, вшитой одним концом в горловину правой полочки, а другим концом треугольной формы пристегивающейся к левой полочке на кнопку; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокетки и доходящими до низа; с двумя верхними накладными карманами, передним срезом входящими в рельефные швы выше линии груди; с двумя нижними накладными карманами, боковые срезы которые входят в рельефные и боковые швы. Нижние карманы с вертикальными швами, заканчивающимися сверху фигурными вырезами; верхние края карманов обработаны обтачками и оформлены декоративными патами шириной 2,8 – 3,0 см, вшитыми одним концом в рельефные швы на уровне верха карманов, а другим концом треугольной формы прикрепляющимися к карманам с помощью кнопок.

Спинка с вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скреплёнными посередине спинки с помощью кнопки. Для регулировки степени прилегания изделия по талии на правом полупоясе должны быть установлены две нижние части кнопки с расстоянием 2,5 см.

Рукава втачные, одношовные, короткие (выше локтя). Посередине нижнего края рукавов – декоративные треугольные вырезы.

По краям бортов, горловине, кокетке, рельефам, низу рукавов, патам, полупоясам, разрезам, швам настрачивания карманов, по верхним краям и вертикальным швам нижних карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1 – 0,2 см от края или шва.

По линиям входа верхних карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,9 – 2,0 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3 – 1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,1 – 1,3 см.

Варианты размеров:

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

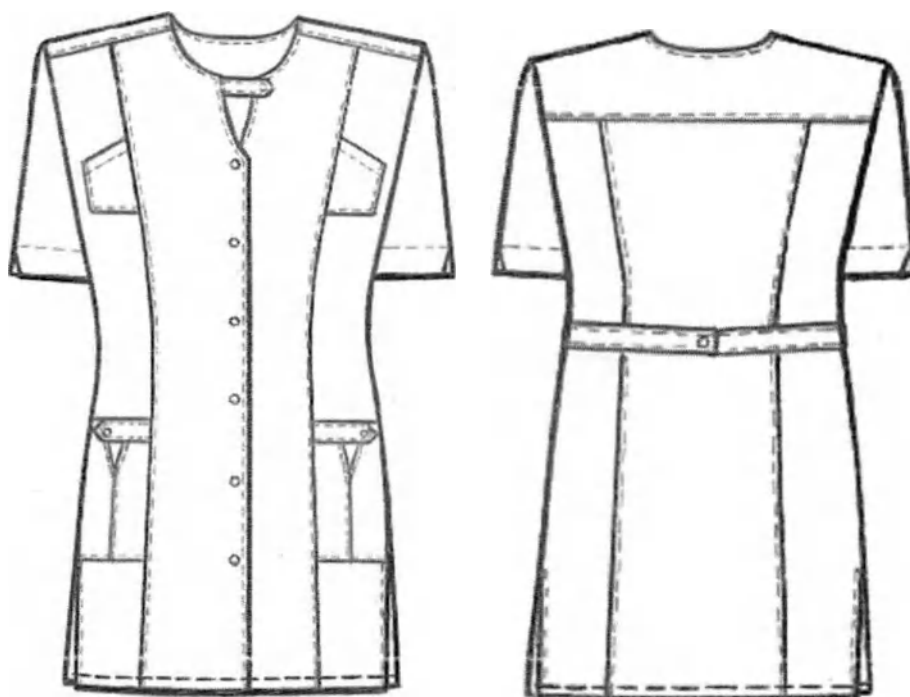


Рисунок В9– Халат медицинский женский модель 111-1

Таблица В9.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 111-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	1	0
4	Бочок спинки	2	1
5	Кокетка	1	0
6	Рукав	2	1
7	Верхний карман	2	1
8	Передняя часть нижнего кармана	2	1
9	Задняя часть нижнего кармана	2	1
10	Полупояс	2	1
11	Пата горловины	2	1
12	Пата кармана	4	2
13	Подборт	2	1
14	Обтачка горловины спинки	1	0
15	Обтачка низа рукава	2	1
16	Обтачка кармана	2	1
Итого		31	14

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 76 из 529

Таблица В9.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 111-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	76,5	77,0	77,5	78,0	78,5	78,9	79,4	79,4	(±) 1,0
		164-170	82,5	83,0	83,5	84,0	84,5	84,9	85,4	85,8	
		176-182	85,5	86,0	86,5	87,0	87,5	87,9	88,4	88,8	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	(±) 0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	79,2	80,1	80,9	81,7	82,5	83,3	84,1	85,0	(±) 1,0
		164-170	85,2	86,1	86,9	87,7	88,5	89,3	90,1	91,0	
		176-182	88,2	89,1	89,9	90,7	91,5	92,3	93,1	94,0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	(±) 1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	(±) 1,0
6	Длина рукава, см	152-158	23,9	24,2	24,4	24,7	25,0	25,3	25,6	26,0	(±) 0,5
		164-170	25,9	26,2	26,4	26,7	27,0	27,3	27,6	28,0	
		176-182	26,9	27,2	27,4	27,7	28,0	28,3	28,6	29,0	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,1	17,8	18,5	19,1	19,8	20,6	21,3	22,0	(±) 0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,0	16,5	17,0	17,6	18,2	18,8	19,2	19,8	(±) 0,5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	6,2	6,4	6,8	7,2	7,7	8,0	8,3	8,7	(±) 0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	9,3	9,5	9,9	10,3	10,5	10,7	10,8	11,1	(±) 0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	13,4	14,1	14,9	15,7	16,4	17,0	17,9	18,8	(±) 0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,8	19,0	(±) 0,3

Продолжение Таблицы В9.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	80,2	80,6	81,0	81,4	81,8	82,2	82,6	83,0	(±) 1,0
		164-170	86,2	86,6	87,0	87,4	87,8	88,2	88,6	89,0	
		176-182	89,2	89,6	90,0	90,4	90,8	91,2	91,6	92,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,4	44,3	45,2	46,0	46,8	47,7	48,6	49,5	(±) 0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	86,1	87,2	88,3	89,4	90,5	91,5	92,5	93,5	(±) 1,0
		164-170	92,1	93,2	94,3	95,4	96,5	97,5	98,5	99,5	
		176-182	95,1	96,2	97,3	98,4	99,5	100,5	101,5	102,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,2	62,4	64,6	66,8	69,0	71,3	73,5	75,8	(±) 1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	70,2	72,4	74,6	76,8	79,0	81,3	83,5	85,8	(±) 1,0

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
6	Длина рукава, см	152-158	26.3	26.6	26.9	27.2	27.5	27.9	28.3	28.7	(+/-)0,5
		164-170	28.3	28.6	28.9	29.2	29.5	29.9	30.3	30.7	
		176-182	29.3	29.6	29.9	30.2	30.5	30.9	31.3	31.7	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22.8	23.5	24.2	24.9	25.5	26.1	26.7	27.3	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	20.4	21	21.6	22.2	22.8	23.4	24.0	24.6	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	8.9	9.1	9.3	9.4	9.6	9.9	10.2	10.4	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	11.3	11.5	11.6	11.7	11.9	12.0	12.0	12.0	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	19.7	20.6	21.5	20.5	20.7	21.0	21.2	21.4	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	(+/-)0,3

В10. Халат медицинский женский модель 112-1.

Описание модели

Халат медицинский женский длиной до середины колена; полуприлегающего силуэта, слегка расширенный книзу (расширение 4,0см); без воротника, с неглубоким V-образным вырезом горловины, обработанным обтачкой; с разрезами в боковых швах.

Перед с центральной бортовой застежкой на 6 обметанных петель и 6 пуговиц; с притачными кокетками; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа; с двумя верхними накладными карманами, передние боковые срезы которых входят в рельефные швы на уровне линии груди; с двумя нижними накладными карманами с наклонным входом, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы. Верхние и нижние карманы – с притачными планками вверх и декоративными вертикальными швами, выходящими из швов притачивания планок и доходящими до низа карманов. В швы притачивания планок левого верхнего и правого нижнего карманов над вертикальными швами втачаны шлевки в виде петель шириной 0,9-1,0см, в которые продеты декоративные металлические пряжки. Ширина планок верхних карманов 3,0-3,2см, нижних 3,5-3,7см.

Спинка с притачной кокеткой, вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скрепленными посередине спинки с помощью пуговицы.

Рукава втачные, одношовные, длиной $\frac{3}{4}$, с притачными манжетами шириной 3,5-3,7см.

По рельефам, кокеткам, поясам, краям бортов, горловине, низу рукавов, швам притачивания манжет, верхним краям карманов, а также швам притачивания планок, вертикальным швам и швам настрачивания карманов должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8см от края или шва.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

По разрезам и краям шлевок должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы пластиковые пуговицы и металлические пряжки шириной 1,0см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.



Рисунок В10– Халат медицинский женский модель 112-1

Таблица В10.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 112-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	1	0
4	Бочок спинки	2	1
5	Кокетка полочки	2	1
6	Кокетка спинки	1	0
7	Рукав	2	1
8	Манжета	2	1
9	Передняя часть нижнего кармана	2	1
10	Задняя часть нижнего кармана	2	1
11	Планка нижнего кармана	2	1
12	Передняя часть верхнего кармана	2	1

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
13	Боковая часть верхнего кармана	2	1
14	Планка верхнего кармана	2	1
15	Полупояс	2	1
16	Шлевки	1	0
17	Подборт	2	1
18	Обтачка горловины спинки	1	0
Итого		32	14

Таблица В10.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 112-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	93.2	93.7	94.2	94.7	95.2	95.6	95.9	96.2	(±)1.0
		164-170	99.2	99.7	100.2	100.7	101.2	101.6	101.9	102.2	
		176-182	102.2	102.7	103.2	103.2	104.2	104.6	104.9	105.2	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	41.9	(±)0.5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	95.9	96.8	97.5	98.3	99.2	100.1	101.0	102.0	(±)1.0
		164-170	101.9	102.8	103.5	104.3	105.2	106.1	107.0	108.0	
		176-182	104.9	105.8	106.5	107.3	108.2	109.1	110.0	111.0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44.5	46.5	48.5	50.5	52.6	54.7	56.8	58.9	(±)1.0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	58.0	60.0	62.0	64.0	66.1	68.2	70.3	72.4	(±)1.0
6	Длина рукава, см	152-158	41.0	41.2	41.4	41.7	42.0	42.3	42.5	42.7	(±)1.0
		164-170	44.0	44.2	44.4	44.7	45.0	45.3	45.5	45.7	
		176-182	45.4	45.7	45.9	45.2	46.5	46.8	47.0	47.2	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17.3	17.8	18.4	19	19.6	20.3	21.0	21.6	(±)0.5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15.0	15.4	15.7	15.8	16	16.4	16.8	17.3	(±)0.5
9	Ширина верхнего кармана внизу, см	все роста	7.1	7.2	7.3	7.5	7.7	7.9	8.3	8.6	(±)0.3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	10.0	10.3	10.7	11.1	11.6	12.0	12.3	12.5	(±)0.3
11	Ширина нижнего кармана внизу, см	все роста	15.6	16.4	17.3	18.0	18.8	19.4	20.2	20.9	(±)0.3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	21.3	21.5	21.7	21.7	21.8	21.8	22.3	22.8	(±)0.3

Продолжение Таблицы В10.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	96.5	96.7	96.9	97.2	97.5	97.7	97.9	98.2	(±)1.0
		164-170	102.5	102.7	102.9	103.2	103.5	103.7	103.9	104.2	
		176-182	105.5	105.7	105.9	106.2	106.5	106.7	106.9	107.2	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	42.8	43.7	44.6	45.5	46.4	47.3	48.2	49.1	(±)0.5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	103.1	103.8	104.7	105.6	106.5	107.3	108.2	109.1	(±)1,0
		164-170	109.1	109.8	110.7	111.6	112.5	113.3	114.2	115.1	
		176-182	112.1	112.8	113.7	114.6	115.5	116.3	117.2	118.1	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	61.0	63.2	65.4	67.6	69.8	72.0	74.2	76.4	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	74.5	76.7	78.9	81.1	83.3	85.6	87.7	89.9	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	42.9	43.2	43.3	43.4	43.5	43.5	43.6	43.8	(±)1,0
		164-170	45.9	46.2	46.3	46.4	46.5	46.5	46.6	46.8	
		176-182	47.4	47.7	47.8	47.9	48.0	48.0	48.1	48.3	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22.3	23.1	23.9	24.7	25.5	26.2	26.8	27.5	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	17.8	18.3	18.8	19.4	20.0	20.4	20.9	21.5	(±)0,5
9	Ширина верхнего кармана внизу, см	все роста	8.9	9.2	9.4	9.7	10.0	10.8	11.5	12.0	(±)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12.8	13.0	13.2	13.6	14.0	14.5	14.8	15.2	(±)0,3
11	Ширина нижнего кармана внизу, см	все роста	21.6	22.3	23	22.0	22.3	22.5	23.0	23,2	(±)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	22.8	23.0	23.2	22.5	22.7	23.0	23.0	23.5	(±)0,3

В11. Халат медицинский женский модель 113-1.

Описание модели

Халат медицинский длиной до колен, слегка приталенный, с небольшим расклешением книзу (расширение = 2,5 см); без воротника с V-образным вырезом горловины, оформленным декоративными дугообразными планками, в швы притачивания которых должен быть проложен кант с наполнителем, и обработанным обтачкой.

Перед с рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с двумя нижними накладными карманами, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы, а верхние края наклонные, оформлены кантом с наполнителем и треугольными декоративными вставками. Ширина канта в готовом виде должна составлять 0,3-0,4 см.

Спинка с отрезной кокеткой, средним швом, двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и завязывающимися посередине спинки.

Рукава втачные, одношовные, длиной до локтя. Низ рукавов должен быть оформлен подгибкой шириной 2,4-2,6 см, застроченной на лицевую сторону.

По горловине, рельефам, кокетке и среднему шву спинки, краям бортов и декоративных вставок, швам застрачивания поясов и подгибки рукавов, швам притачивания планок горловины и швам настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA¹ по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

Кант для отделки должен использоваться в контрастном сочетании с цветом основной ткани.

В качестве фурнитуры должны использоваться пластиковые пуговицы диаметром 1,7-1,9 см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.



Рисунок В11– Халат медицинский женский модель 113-1

Таблица В11.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 113-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	2	1
4	Кокетка спинки	1	0
5	Планка горловины полочки	2	1
6	Рукав	2	1
7	Карман	2	1
8	Вставка кармана	2	1
9	Обтачка кармана	2	1
10	Полупояс	2	1
11	Подборт	2	1

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

12	Обтачка горловины спинки	1	0
Итого		22	10

Таблица В11.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 113-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	89,8	90,3	90,8	91,4	91,8	92,2	93,0	94,0	(±)1,0
		164-170	93,8	96,3	96,8	97,4	97,8	98,2	99,0	100,0	
		176-182	98,8	99,3	99,8	100,4	100,8	101,2	102,0	103,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	36,6	37,5	38,3	39,2	40,2	41,1	42,0	42,7	(±)1,0
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	93,0	94,3	95,0	95,8	96,5	97,4	98,5	99,8	(±)1,0
		164-170	99,0	100,3	101,0	101,8	102,5	103,4	104,5	105,8	
		176-182	102,0	103,3	104,0	104,8	105,5	106,4	107,5	108,8	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	46,5	48,6	50,7	52,8	54,9	57,0	59,1	61,3	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	54,6	56,7	58,8	60,9	63,0	65,1	67,2	69,4	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	34,8	34,9	35,0	35,2	35,4	35,8	36,2	36,4	(±)1,0
		164-170	37,8	37,9	38,0	38,2	38,4	38,8	39,2	39,4	
		176-182	39,3	39,4	39,5	39,7	39,9	40,3	40,7	40,9	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	18,0	18,6	19,3	19,9	20,5	21,2	22,0	22,8	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу	все роста	15,6	16,0	16,4	16,8	17,1	17,5	18,0	18,7	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см, см	все роста	13,3	14,2	15,0	15,8	16,6	17,4	18,2	19,1	(±)0,3
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	17,0	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,9	(±)0,3

Продолжение Таблицы В11.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	95,2	96,4	97,4	97,9	98,5	99,1	100,1	102,4	(±)1,0
		164-170	101,2	102,4	103,4	103,9	104,5	105,1	106,1	108,4	
		176-182	104,2	105,4	106,4	106,9	107,5	108,1	109,1	111,4	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,3	44,1	45,0	45,6	46,3	47,1	48,0	48,8	(±)1,0
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	101,2	103,2	104,8	106,1	107,4	108,5	110,3	114,5	(±)1,0
		164-170	107,2	109,2	110,8	112,1	113,4	114,5	116,3	120,5	
		176-182	110,2	112,2	113,8	115,1	116,4	117,5	119,3	123,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	63,4	65,5	67,6	69,8	71,9	74,0	76,1	78,2	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	71,6	73,8	76,2	79,0	81,5	84,0	86,5	89,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	36,6	36,9	37,0	37,2	37,5	37,6	37,7	38,0	(±)1,0
		164-170	39,6	39,9	40,0	40,2	40,5	40,6	40,7	41,0	
		176-182	41,1	41,4	41,5	41,7	42,0	42,1	42,2	42,5	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	23,5	24,1	24,7	25,4	26,1	26,9	27,7	28,6	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
8	Ширина рукава внизу	все роста	19,2	19,6	20,0	20,5	21,0	21,7	22,7	24,0	(+/-)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см, см	все роста	19,9	20,7	21,5	22,5	23,8	25,0	26,5	27,6	(+/-)0,3
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	18,0	18,1	19,0	19,0	19,1	19,5	20,0	20,1	(+/-)0,3

В12. Халат медицинский женский модель 114-1.

Описание модели

Халат медицинский женский длиной до середины колена; полуприлегающего силуэта, слегка расширенный книзу (расширение 4,0см); без воротника, с трапециевидным вырезом горловины, обработанным обтачкой на спинке и притачными отложными планками шириной 3,5 – 3,7 см на перед.

Перед с центральной бортовой застёжкой на 6 кнопок; с притачными кокетками, в швы притачивания которых входят концы планок горловины, с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток, доходящими до низа и заканчивающимися внизу заутюженными односторонними складками. Полочки отрезные ниже линии талии на 10 см, в швах подрезов обработаны боковые карманы, в углах которых должны быть установлены металлические хольнитены.

Спинка с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов, доходящими до низа и заканчивающимися внизу заутюженными односторонними складками; с двумя полупоясами, вышитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скреплёнными посередине спинки с помощью кнопки. Для регулировки степени прилегания изделия по талии на правом полупоясе должны быть установлены две нижних части кнопки с расстоянием 2,5 см.

Рукава втачные, одношовные, короткие (длиной выше локтя), с притачными отложными манжетами шириной 3,5 -3,7 см.

По кокеткам, рельефам, подрезу переда, краям бортов, полупоясов и горловине спинки должны быть проложены строчки на расстоянии 0,1 – 0,2 см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3 – 1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,1 – 1,3 см и металлические хольнитены диаметром 0,5 – 0,6 см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

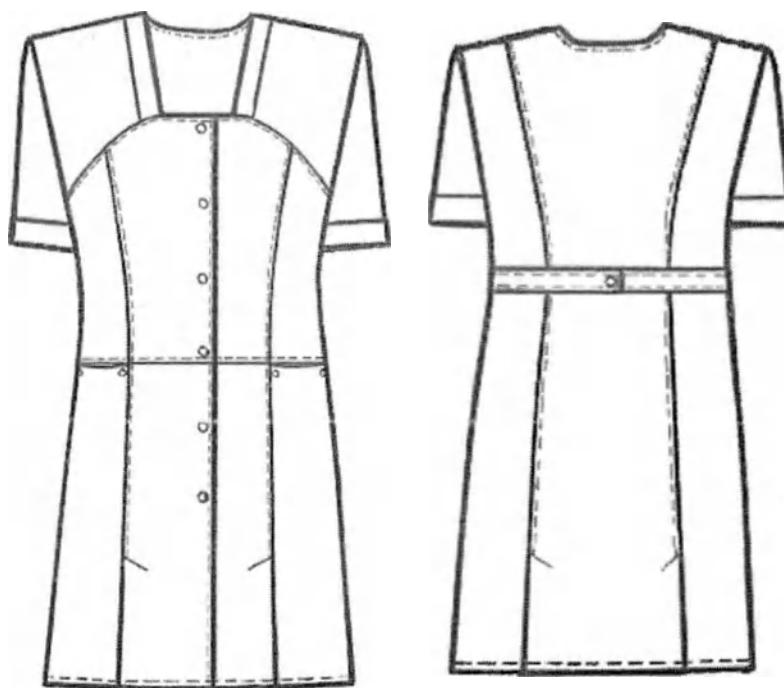


Рисунок В12– Халат медицинский женский модель 114-1

Таблица В12.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 114-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Верхняя часть полочки	2	1
2	Нижняя часть полочки	2	1
3	Верхняя часть бочка полочки	2	1
4	Нижняя часть бочка полочки	2	1
5	Кокетка полочки	2	1
6	Спинка	1	0
7	Бочок спинки	2	1
8	Рукав	2	1
9	Манжета	2	1
10	Планка горловины	2	1
11	Полупояс	2	1
12	Мешковина кармана	4	2
13	Подборт	2	1
14	Обтачка горловины спинки	1	0
Итого		28	13

Таблица В12.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 114-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	93,7	94,0	94,5	95,0	95,5	95,8	96,1	96,4	(±)1,0
		164-170	99,7	100,0	100,5	101,0	101,5	101,8	102,1	102,4	
		176-182	102,7	103,0	103,5	104,0	104,5	104,8	105,1	105,4	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,5	36,5	37,6	38,7	39,7	40,7	41,8	42,8	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	96,3	97,0	97,7	98,4	99,1	99,8	100,5	101,3	(±)1,0
		164-170	102,3	103,0	103,7	104,4	105,1	105,8	106,5	107,3	
		176-182	105,3	106,0	106,7	107,4	108,1	108,8	109,5	110,3	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	23,1	23,3	23,5	23,7	24,0	24,2	24,4	24,6	(±)0,5
		164-170	26,1	26,3	26,5	26,7	27,0	27,2	27,4	27,6	
		176-182	27,6	27,8	28,0	28,2	28,5	28,7	28,9	29,1	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,3	18,0	18,7	19,3	20,0	20,8	21,5	22,2	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,0	16,7	17,3	17,9	18,5	19,1	19,7	20,3	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	13,5	14,2	15,0	15,7	16,5	17,3	18,1	18,9	(±)0,3
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	19,0	19,0	19,0	19,0	19,5	19,5	19,5	20,0	(±)0,3

Продолжение Таблицы В12.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	96,7	97,0	97,3	97,5	97,8	98,0	98,3	98,5	(±)1,0
		164-170	102,7	103,0	103,3	103,5	103,8	104,0	104,3	104,5	
		176-182	105,7	106,0	106,3	106,5	106,8	107,0	107,3	107,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,8	44,7	45,6	46,5	47,4	48,3	49,2	50,0	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	102,1	103,0	103,9	104,8	105,7	106,6	107,5	108,5	(±)1,0
		164-170	108,1	109,0	109,9	110,8	111,7	112,6	113,5	114,5	
		176-182	111,1	112,0	112,9	113,8	114,7	115,6	116,5	117,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,2	62,4	64,6	66,8	69,0	71,2	73,4	75,6	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	73,2	75,4	77,6	79,8	82,0	84,2	86,4	88,6	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	24,9	25,2	25,5	25,8	26,1	26,5	26,8	27,1	(±)0,5
		164-170	27,9	28,2	28,5	28,8	29,1	29,5	29,8	30,1	
		176-182	29,4	29,7	30,0	30,3	30,6	31,0	31,3	31,6	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	23,0	23,7	24,4	25,1	25,8	26,5	27,2	27,9	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	20,8	21,3	21,9	22,5	23,1	23,7	24,3	24,9	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	19,7	20,3	21,0	21,8	22,7	23,6	24,4	25,2	(±)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-

2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	(+/-)0,3

В13. Халат медицинский женский модель 115-1.

Описание модели

Халат медицинский женский укороченный (длиной до колена); полуприлегающего силуэта, слегка расширенный к низу (расширение 4,0см); без воротника, с асимметричным фигурным вырезом горловины зигзагообразной формы, обработанным обтачкой.

Перед с центральной бортовой застежкой на 6 кнопок; с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов, доходящими до низа и заканчивающимися разрезами; с двумя нижними накладными карманами с наклонным входом, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы.

Спинка с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов, доходящими до низа и заканчивающимися разрезами; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии, и скрепленными посередине спинки при помощи двух металлических полуколец, продетых в застроченную подгибку левого полупояса.

Рукава втачные, одношовные, короткие (длиной выше локтя). Посередине рукавов – декоративные треугольные вырезы.

По краям бортов, горловине, рельефам, полупоясам, разрезам и швам настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

По верхним краям карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,3-2,5см.

По низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 4,3-4,5см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические пряжки шириной 3,0-3,5см и металлические кнопки диаметром 1,1-1,2см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

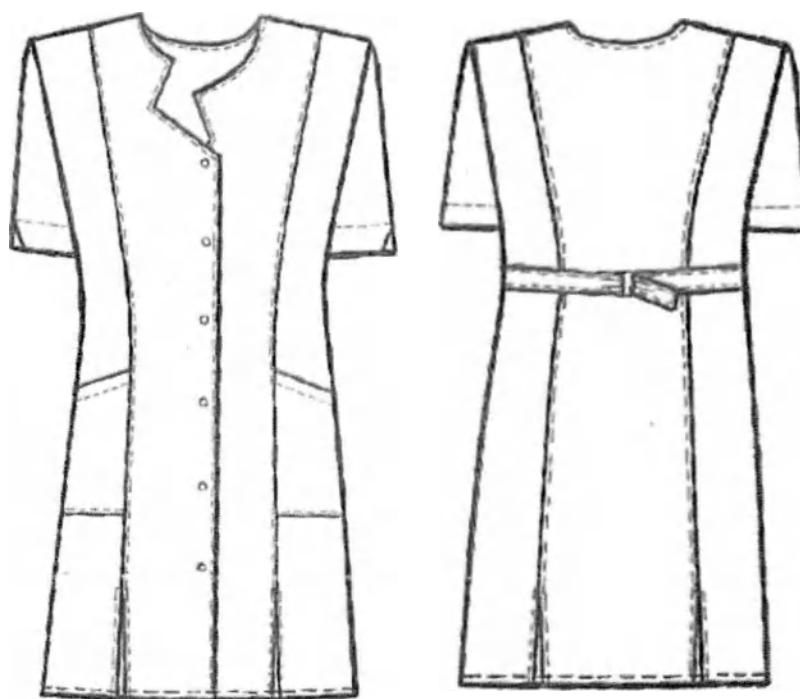


Рисунок В13– Халат медицинский женский модель 115-1

Таблица В13.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 115-

1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Левая полочка	1	0
2	Правая полочка	1	0
3	Бочок полочки	2	1
4	Спинка	1	0
5	Бочок спинки	2	1
6	Рукав	2	1
7	Карман	2	1
8	Подборт левой полочки	1	0
9	Подборт правой полочки	1	0
10	Правый полупояс	1	0
11	Левый полупояс	1	0
12	Обтачка низа рукава	2	1
13	Обтачка горловины спинки	1	0
Итого:		18	5

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-
2023, ред.2

Страница 88 из 529

Таблица В13.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 115-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	88,0	88,5	89,0	89,5	90,0	90,5	91,0	91,6	(±)1,0
		164-170	94,0	94,5	95,0	95,5	96,0	96,5	97,0	97,6	
		176-182	97,0	97,5	98,0	98,5	99,0	99,5	100,0	100,6	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	90,2	91,0	91,9	92,8	93,7	94,6	95,5	96,5	(±)1,0
		164-170	96,2	97,0	97,9	98,8	99,7	100,6	101,5	102,5	
		176-182	99,2	100,0	100,9	101,8	102,7	103,6	104,5	105,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,5	46,5	48,5	50,7	52,8	54,9	57,0	59,0	(±) 1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	54,5	56,8	59,1	61,4	63,7	66,0	68,3	70,5	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	24,2	24,6	25,0	25,4	25,8	26,2	26,6	27,0	(±)1,0
		164-170	26,2	26,6	27,0	27,4	27,8	28,2	28,6	29,0	
		176-182	27,2	27,6	28,0	28,4	28,8	29,2	29,6	30,0	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	18,0	18,5	19,1	19,6	20,2	20,7	21,3	22	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,3	16,8	17,3	17,8	18,3	18,8	19,3	19,8	(±) 0,5
9	Ширина нижнего кармана внизу, см	все роста	15,8	16,6	17,3	18,0	18,8	19,5	20,2	21,0	(±) 0,3
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	21,6	21,8	22,0	22,2	22,3	22,5	22,6	22,8	(±)0,3

Продолжение Таблицы В13.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	92,2	92,7	93,2	93,7	94,0	94,4	94,7	95,0	(±)1,0
		164-170	98,2	98,7	99,2	99,7	100,	100,4	100,7	101,0	
		176-182	101,2	101,7	102,2	102,7	103,0	103,4	103,7	104,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,5	44,5	45,2	45,8	46,5	47,5	48,5	49,5	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	97,6	98,6	99,7	100,8	101,8	102,9	103,9	105,0	(±)1,0
		164-170	103,6	104,6	105,7	106,8	107,8	108,9	109,9	111,0	
		176-182	106,6	107,6	108,8	109,8	110,8	111,9	112,9	114,0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	61,2	63,4	65,6	67,8	70,0	72,2	74,4	76,6	(±) 1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	72,7	74,9	77,1	79,3	81,5	83,5	85,5	87,5	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	27,3	27,7	28,1	28,4	28,7	29,0	29,3	29,5	(±)1,0
		164-170	29,3	29,7	30,1	30,4	30,7	31,0	31,3	31,5	
		176-182	30,3	30,7	31,1	31,4	31,7	32,0	32,3	32,5	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,8	23,6	24,4	25,2	26,0	26,8	27,5	28,3	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	20,4	21,0	21,6	22,2	22,8	23,5	24,2	25,0	(±) 0,5
9	Ширина нижнего кармана внизу, см	все роста	21,8	22,6	23,3	22,0	22,3	22,5	23,0	23,5	(±) 0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	22,9	23,0	23,0	23,0	23,0	23,3	23,3	23,3	(+/-)0,3
----	---	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

В14. Халат медицинский женский модель 116-1.

Описание модели

Халат медицинский женский длиной ниже колена; прямого силуэта, умеренного объема, слегка расширенный книзу (расширение 2,0см).

Перед с отложными лацканами до линии груди, с центральной бортовой застёжкой на 5 обмётанных петель и 5 пуговиц; с рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с одним верхним накладным карманом, входящим передним боковым срезом в рельефные швы на уровне линии груди; с двумя нижними накладными карманами, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы.

Спинка со средним швом и двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и завязывающимися посередине спинки.

Рукава втачные, одношовные, длинные.

Воротник отложной «пиджачного» типа.

По рельефам, краям бортов, воротнику, швам застрачивания поясов и шву втачивания воротника в горловину проложена строчка на расстоянии 0,1 – 0,2 см от края или шва.

По линиям входа в верхние карманы должна быть проложена строчка на расстоянии 1,6 – 1,8 см от края.

По верхним краям нижних накладных карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,9 – 2,1 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3 – 1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы пластиковые пуговицы диаметром 1,7 – 1,9 см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.



Рисунок В14– Халат медицинский женский модель 116-1

Таблица В14.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 116-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	2	1
4	Рукав	2	1
5	Подборт	2	1
6	Верхний карман	1	0
7	Нижний карман	2	1
8	Полупояс	2	1
9	Воротник	2	1
Итого:		17	8

Таблица В14.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 116-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	100,0	100,0	100,2	100,2	100,4	100,4	100,5	100,5	(+/-) 1,0
		164-170	106,0	106,0	106,2	106,2	106,4	106,4	106,5	106,5	
		176-182	109,0	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,5	109,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	42,5	(+/-) 0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	101,0 107,0 110,0	102,0 108,0 111,0	102,5 108,5 111,5	103,5 109,5 112,5	104,5 110,5 113,5	105,0 111,0 114,0	106,0 112,5 115,0	106,5 112,5 115,5	(+/-) 1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	(+/-) 1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	(+/-) 1,0
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	54,5 58,5 60,5	54,7 58,7 60,7	54,9 58,9 60,9	55,1 59,1 61,1	55,3 59,3 61,3	55,5 59,5 61,5	55,7 59,7 61,7	55,9 59,9 61,9	(+/-) 1,0
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,7	(+/-) 0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	14,5	14,7	15,0	15,2	15,4	15,7	16,0	16,2	(+/-) 0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	9,6	(+/-) 0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	11,5	11,8	12,0	12,2	12,5	12,8	13,0	13,2	(+/-) 0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	15,0	15,8	16,6	17,4	18,2	19,0	19,8	20,6	(+/-) 0,5
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	19,0	19,0	19,0	19,0	19,5	19,5	19,5	19,8	(+/-) 0,3
13	Длина воротника по отлёту, см	все роста	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,2	(+/-) 0,5

Продолжение Таблицы В14.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	100,6 106,6 109,6	100,7 106,7 109,7	100,8 106,8 109,8	100,9 106,9 109,9	101,0 107,0 110,0	101,1 107,1 110,1	101,2 107,2 110,2	101,3 107,3 110,3	(+/-) 1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	(+/-) 0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	107,0 113,0 116,0	108,0 114,0 117,0	108,5 114,5 117,5	109,0 115,0 118,0	109,5 115,5 118,5	110,0 116,0 119,0	110,5 116,5 119,5	111,0 117,0 120,0	(+/-) 1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	64,0	66,0	68,5	70,5	73,0	75,0	77,0	79,5	(+/-) 1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	71,0	73,0	75,5	77,5	80,0	82,0	84,0	86,5	(+/-) 1,0
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	56,1 60,1 62,1	56,3 60,3 62,3	56,5 60,5 62,5	56,7 60,7 62,7	56,9 60,9 62,9	57,1 61,1 63,1	57,3 61,3 63,3	57,5 61,5 63,5	(+/-) 1,0
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,4	23,0	23,6	24,3	25,0	25,7	26,3	27,0	(+/-) 0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,5	16,7	17,0	17,2	17,5	17,8	18,0	18,2	(+/-) 0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	9,8	10,0	10,2	10,4	10,5	10,6	10,8	11,0	(+/-) 0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	13,4	13,5	13,6	13,8	14,0	14,2	14,3	14,5	(+/-) 0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
11	Ширина нижнего кармана по линии входа. см	все роста	21.4	22.2	23	21.0	21.5	21.5	21.5	22.0	(+/-) 0,5
12	Глубина нижнего кармана. см	все роста	20.0	20.0	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	(+/-) 0,3
13	Длина воротника по отлёту. см	все роста	53.4	54.6	55.8	57.0	58.0	59.2	60.4	61.6	(+/-) 0,5

В15. Халат медицинский женский модель 117-1.

Описание модели.

Халат медицинский женский длиной до середины колена; полуприлегающего силуэта, слегка расширенный книзу (расширение=3,0 см).

Перед с центральной застёжкой встык на молнию-застежку; с фигурным вырезом горловины, с изогнутыми, S – образными рельефными швами, выходящими из горловины, проходящими через центр груди и заканчивающимися в боковых швах ниже линии талии; с двумя боковыми карманами в рельефных швах.

Спинка со средним швом, заканчивающимся шлицей, с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скрепленными посередине спинки с помощью пуговицы.

Рукава втачные, одношовные, длиной $\frac{3}{4}$, с притачными манжетами, разрезными посередине рукавов. Углы манжет закруглённые и располагаются внахлёст (передние края манжет поверх задних).

Воротник-стойка с закруглёнными углами, на полочках доходящая до начала рельефных швов.

По краям воротника и манжет, а также по рельефным швам переда проложен кант с наполнителем. Ширина канта в готовом виде должна составлять 0,2 – 0,4 см.

По рельефам, воротнику, манжетам, горловине переда, шву втачивания молнии-застежки, полупоясам, швам втачивания манжет должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1 – 0,2 см от шва или края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3 – 1,5 см от края.

Кант для отделки должен использоваться в контрастном сочетании с цветом ткани.

В качестве фурнитуры должна быть использована пластиковая молния-застежка и пластиковая пуговица диаметром 1,7 – 1,9 см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 93 из 529



Рисунок В15– Халат медицинский женский модель 117-1

Таблица В15.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 117-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	2	1
4	Рукав	2	1
5	Манжета	4	2
6	Воротник	2	1
7	Полупояс	2	1
8	Подборт	2	1
9	Мешковина кармана	2	1
Итого		20	10

Таблица В15.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 117 -1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	90.3	90.9	91.5	92.0	92.4	92.8	93.0	93.3	(±)1.0
		164-170	96.3	96.9	97.5	98.0	98.4	98.8	99.0	99.3	
		176-182	99.3	99.9	100.5	101.0	101.4	101.8	102.0	102.3	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35.6	36.6	37.6	38.6	39.4	40.0	40.6	41.2	(±)0.5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	93.0	94.0	94.8	95.7	96.4	97.2	97.7	98.5	(±)1.0
		164-170	99.0	100.0	100.8	101.7	102.4	103.2	103.7	104.5	
		176-182	102.0	103.0	103.8	104.7	105.4	106.2	106.7	107.5	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

4	Ширина изделия на уровне глубины проймы. см	все роста	47.0	49.0	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0	(+/-)1.0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки). см	все роста	54.0	56.1	58.2	60.3	62.3	64.4	66.5	68.7	(+/-)1.0
6	Длина рукава. см	152-158 164-170 176-182	38.4 41.4 42.9	38.6 41.6 43.1	38.8 41.8 43.3	39.0 42.0 43.5	39.5 42.5 44.0	39.7 42.7 44.2	40.0 43.0 44.5	40.2 43.2 44.7	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой. см	все роста	17.6	18.2	18.8	19.5	20.2	20.9	21.4	22.1	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу. см	все роста	14.2	14.9	15.5	16	16.4	16.7	17.1	17.5	(+/-)0,5
9	Длина воротника по отлёту. см	все роста	30.3	31.0	31.8	32.6	33.4	34.2	35.0	35.7	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В15.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине. см	152-158 164-170 176-182	93.8 99.8 102.8	94.5 100.5 103.5	94.6 100.6 103.6	98.5 104.5 107.5	98.8 104.8 107.8	99.0 105.0 108.0	101.0 107.0 110.0	101.2 107.2 110.2	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте. см	все роста	41.7	42.4	43.0	43.8	44.4	45.2	46.0	46.6	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа. см	152-158 164-170 176-182	99.7 105.7 108.7	101.1 107.1 110.1	101.8 107.8 110.8	106.5 112.5 115.5	107.5 113.5 116.5	108.3 114.3 117.3	110.9 116.9 119.9	111.7 117.7 120.7	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы. см	все роста	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	77.0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки). см	все роста	71.2	73.8	76.2	79.0	81.5	84.0	86.5	89.0	(+/-)1,0
6	Длина рукава. см	152-158 164-170 176-182	40.4 43.4 44.9	40.6 43.6 45.1	40.8 43.8 45.3	41.0 44.0 45.5	41.2 44.2 45.7	41.4 44.4 45.9	41.6 44.6 46.1	41.8 44.8 46.3	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой. см	все роста	22.8	23.4	24.1	24.8	25.4	26	26.6	27.2	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу. см	все роста	18	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.6	(+/-)0,5
9	Длина воротника по отлёту. см	все роста	36.4	37.1	37.8	38.5	39.2	40.0	40.7	41.4	(+/-)0,5

В16. Халат медицинский женский модель 118-1.

Описание модели

Халат медицинский женский длиной до середины колена; полуприлегающего силуэта, слегка расширенный к низу (расширение=5,5см); без воротника, с фигурным вырезом горловины, обработанным обтачкой.

Перед с центральной бортовой застежкой на 6 обметанных петель и 6 пуговиц; с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с двумя нижними накладными карманами, боковые срезы которых входят в рельефные и

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

боковые швы. По горловине переда и краю борта правой полочки проложен кант шириной 0,3-0,4см с наполнителем.

Спинка с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скрепленными посередине спинки с помощью пуговицы.

Рукава втачные, одношовные, длиной ниже локтя. Низ рукавов оформлен кантом шириной 0,3-0,4см с наполнителем и декоративной пуговицей, пришитой посередине рукава, на расстоянии 2,0см от края.

По краям бортов, горловине, низу рукавов, швам настрачивания карманов и нижнему краю поясов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края. По верхним краям карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,8-2,0 см от края. По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

Для отделки должен быть использован кант в контрастном сочетании с цветом ткани.

В качестве фурнитуры должны быть использованы пластиковые пуговицы диаметром 1,7-1,9см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;
Рост: 152-158, 164-170, 176-182.



Рисунок В16– Халат медицинский женский модель 118-1

Таблица В16.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 118-1

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	1	0
4	Бочок спинки	2	1
5	Рукав	2	1
6	Подборт	2	1
7	Карман	2	1
8	Полупояс	2	1
9	Обтачка низа рукава	2	1
10	Обтачка горловины спинки	1	0
Итого:		18	8

Таблица В16.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Халат медицинский женский модель 118-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	91.4	91.8	92.2	92.7	93.2	93.6	94.0	94.4	(±)1.0
		164-170	97.4	97.8	98.2	98.7	99.2	99.6	100.0	100.4	
		176-182	100.4	100.8	101.2	101.7	102.2	102.6	103.0	103.4	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	(±)0.5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	93.2	94.0	94.8	95.7	96.6	97.4	98.3	99.1	(±)1.0
		164-170	99.2	100.0	100.8	101.7	102.6	103.4	104.3	105.1	
		176-182	102.2	103.0	103.8	104.7	105.6	106.4	107.3	108.1	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	45.0	47.0	49.0	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	(±)1.0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	58.0	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	72.0	(±)1.0
6	Длина рукава, см	152-158	39.0	39.2	39.4	39.6	39.8	40.0	40.2	40.4	(±)1.0
		164-170	42.0	42.2	42.4	42.6	42.8	43.0	43.2	43.4	
		176-182	43.5	43.7	43.9	44.1	44.3	44.5	44.7	44.9	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17.3	17.8	18.4	19.2	19.8	20.4	21.0	21.6	(±)0.5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15.0	15.4	15.7	16	16.4	16.8	17.3	17.8	(±)0.5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	13.7	14.5	15.2	16.0	16.8	17.6	18.0	19.0	(±)0.3
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	19.0	19.1	(±)0.3

Продолжение Таблицы В16.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	94,8 100,8 103,8	95,0 101,0 104,0	95,3 101,3 104,3	95,6 101,6 104,6	96,0 102,0 105,0	96,4 102,4 105,4	96,8 102,8 105,8	97,2 103,2 106,2	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	99,9 105,9 108,9	100,9 106,9 109,9	101,8 107,8 110,8	102,7 108,7 111,7	103,6 109,6 112,6	104,5 110,5 113,5	105,4 111,4 114,4	106,3 112,3 115,3	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	61,0	63,2	65,4	67,6	69,8	72,0	74,2	76,4	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	74,0	76,3	78,5	81	83,5	85,6	87,7	89,8	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	40,6 43,6 45,1	40,8 43,8 45,3	41,0 44,0 45,5	41,2 44,2 45,7	41,4 44,4 45,9	41,5 44,5 46,0	41,6 44,6 46,1	41,8 44,8 46,3	(+/-)1,0
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,3	23,1	23,9	24,7	25,5	26,3	27,0	27,8	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	18,3	18,8	19,3	19,9	20,3	20,8	21,2	21,6	(+/-)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	20,0	20,8	21,5	20,5	20,5	20,8	21,0	21,3	(+/-)0,3
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,4	19,5	(+/-)0,3

В17. Халат медицинский женский модель 119-1.

Описание модели

Халат медицинский женский укороченный (длиной до середины бедра); полуприлегающего силуэта, слегка расширенный книзу (расширение-3,0 см), с разрезами в боковых швах.

Перед с центральной бортовой застёжкой до верха на 12 парно расположенных кнопок; отрезной по линии талии; с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до шва соединения верхней и нижней частей переда, с двумя верхними накладными карманами, передние срезы которых входят в рельефные швы на уровне линии груди, а верхние края имеют дугообразную форму и обработаны обтачками; с двумя боковыми накладными карманами, задние срезы которых входят в боковые швы, а верхний край частично входит в шов соединения верхней и нижней частей переда. Входы в карман закруглённые, выходят из шва соединения верхней и нижней частей переда и заканчиваются в боковых швах. Над карманами в шов соединения верхней и нижней частей переда вшиты 2 декоративные паты шириной 3,5 – 3,7 см свободным концом треугольной формы прикрепляющиеся к карманам с помощью кнопок.

Спинка с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с двумя декоративными патами шириной 3,5 – 3,7 см, вшитыми одним концом в рельефные швы на уровне линии талии, а другим концом треугольной формы прикрепляющиеся к средней части спинки с помощью кнопок.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Рукава втачные, одношовные, длинные с притачными отложными манжетами шириной 3,3 – 3,5 см и декоративными патами шириной 3,2 – 3,7 см, вшитыми одним концом в шов притачивания манжет посередине рукавов, а другим концом треугольной формы прикрепляющиеся к рукаву с помощью кнопок.

По рельефам, краям бортов, воротника, пат, манжет, по горловине переда, шву соединения верхней и нижней его частей, по верхним краям и швам настрачивания верхних и нижних карманов должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1 – 0,2 и 0,7 – 0,8 см от края или шва.

По разрезам и шву втачивания воротника в горловину спинки должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1 – 0,2 см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3 – 1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,1 – 1,3 см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.



Рисунок В17 – Халат медицинский женский модель 119-1

Таблица В17.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 119-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Верхняя часть полочки	2	1

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет. кроя	Кол-во зеркально
2	Верхняя часть бочка полочки	2	1
3	Нижняя часть полочки	2	1
4	Спинка	1	0
5	Бочок спинки	2	1
6	Рукав	2	1
7	Верхний карман	2	1
8	Нижний карман	2	1
9	Отворот рукава	2	1
10	Подборт	2	1
11	Обтачка верхнего кармана	2	1
12	Обтачка нижнего кармана	2	1
13	Пата декоративная	12	6
14	Воротник	2	1
Итого		37	18

Таблица В17.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Халат медицинский женский модель 119-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	80,4	80,9	81,5	82,0	82,4	82,8	83,2	83,6	(±)1,0
		164-170	86,4	86,9	87,5	88,0	88,4	88,8	89,2	89,6	
		176-182	89,4	89,9	90,5	91,0	91,4	91,8	92,2	92,6	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	34,5	35,7	36,8	38,0	39,2	40,5	41,5	42,5	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	83,4	84,3	85,0	85,8	86,7	87,6	88,5	89,5	(±)1,0
		164-170	89,4	90,3	91,0	91,8	92,7	93,6	94,5	95,5	
		176-182	92,4	93,3	94,0	94,8	95,7	96,6	97,5	98,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	57,0	57,0	57,1	57,2	57,2	57,4	57,5	57,6	(±)1
		164-170	61,0	61,0	61,1	61,2	61,2	61,4	61,5	61,6	
		176-182	63,0	63,0	63,1	63,2	63,2	63,4	63,5	63,6	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,2	17,8	18,5	19,1	19,8	20,6	21,3	22,0	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	13,7	14,0	14,2	14,5	14,8	15,0	15,3	15,5	(±)0,5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,5	8,8	9,0	(±)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	10,8	11,0	11,3	11,5	11,7	12	12,2	12,4	(±)0,3
11	Ширина нижнего кармана по нижнему краю, см	все роста	16,5	17,3	18,1	18,9	19,7	20,5	21,2	21,9	(±)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-
2023, ред.2

12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	24,8	25,0	25,1	25,2	25,3	25,5	25,6	25,7	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлёту, см	все роста	35,6	36,7	37,8	38,9	40,0	41,0	42,0	43,0	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В17.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	83,8	84,0	84,2	84,5	84,8	85,0	85,3	85,5	(+)1,0
		164-170	89,8	90,0	90,2	90,5	90,8	91,0	91,3	91,5	
		176-182	92,8	93,0	93,2	93,5	93,8	94,0	94,3	94,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,5	44,4	45,3	46,2	47,1	48,0	48,9	49,8	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	90,4	91,3	92,2	93,1	94,0	94,8	95,7	96,6	(+)1,0
		164-170	96,4	97,3	98,2	99,1	100,0	100,8	101,7	102,6	
		176-182	99,4	100,3	101,2	102,1	103,0	103,8	104,7	105,6	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,2	62,4	64,6	66,8	69,0	71,3	73,5	75,8	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	70,2	72,4	74,6	76,8	79,0	81,3	83,5	85,8	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	57,6	57,8	57,9	58,0	58,1	58,2	58,3	58,4	(+)1
		164-170	61,6	61,8	61,9	62,0	62,1	62,2	62,3	62,4	
		176-182	63,6	63,8	63,9	64,0	64,1	64,2	64,3	64,4	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,8	23,5	24,2	24,9	25,5	26,1	26,7	27,3	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,8	16,1	16,4	16,6	16,8	17	17,2	17,5	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	9,2	9,5	9,7	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,5	12,6	12,8	13,0	13,2	13,3	13,4	13,6	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по нижнему краю, см	все роста	22,6	23,3	24	24,7	25,4	26,1	26,8	27,5	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	25,8	25,9	26,0	26,0	26,1	26,2	26,3	26,3	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлёту, см	все роста	44,0	45,0	46,0	47,00	48,00	49,0	50,0	51,0	(+/-)0,5

В18. Халат медицинский женский модель 120-1.

Описание модели

Халат медицинский женский длиной выше колена; полуприлегающего силуэта, слегка расширенный книзу (расширение 3,5см); с отрезной нижней частью (шириной 16-18см в зависимости от размера); с расширенным вырезом горловины.

Перед с рельефными швами, выходящими из верхней части пройм и доходящими до шва притачивания нижней части; с двумя нижними накладными карманами прямоугольной формы, передними краями входящими в рельефные швы.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Спинка с центральной застежкой на молнию-застежку в среднем шве; с рельефными швами, выходящими из верхней части пройм и доходящими до шва притачивания нижней части.

Рукава втачные одношовные, короткие, длиной выше локтя; с притачными манжетами шириной 3,9-4,1 см.

Воротник - стойка.

Манжеты, карманы и нижняя часть могут быть выполнены из отделочной гладкокрашеной ткани.

По рельефам, краям воротника, швам притачивания манжет и нижней части, а также по швам настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По верхним краям карманов и низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 3,2-3,4 см.

В качестве фурнитуры должна быть использована пластиковая молния-застежка длиной 60 см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

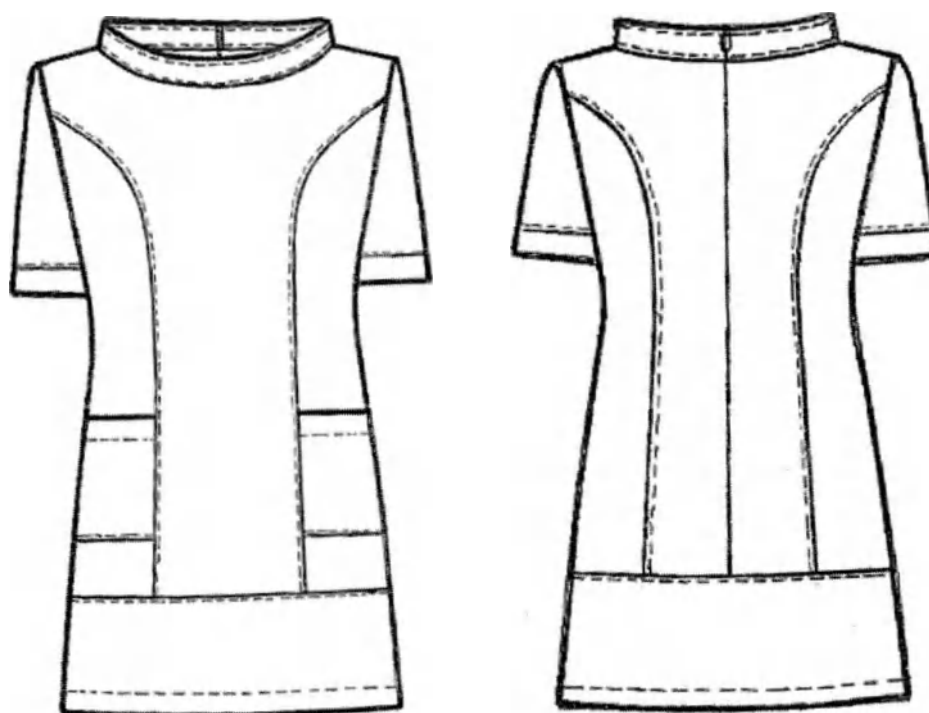


Рисунок В18—Халат медицинский женский модель 120-1

Таблица В18.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 120-1

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-
2023, ред.2

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	1	0
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	2	1
4	Бочок спинки	2	1
5	Воротник	2	1
6	Рукав	2	1
Отделочная ткань			
7	Нижняя часть переда	1	1
8	Нижняя часть спинки	1	1
9	Манжета	2	1
10	Карман	2	1
Итого		17	7

Таблица В18.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Халат медицинский женский модель 120-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	78,0	78,2	78,3	78,4	78,5	79,3	79,8	80,3	(±)1,0
		164-170	84,0	84,2	84,3	84,4	84,5	85,3	85,8	86,3	
		176-182	87,0	87,2	87,3	87,4	87,5	88,3	88,8	89,3	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	33,2	34,0	35,0	35,9	36,9	37,8	38,8	39,8	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	81,0	81,6	82,1	82,7	83,4	84,2	85,1	86,0	(±)1,0
		164-170	87,0	87,6	88,1	88,7	89,4	90,2	91,1	92,0	
		176-182	90,0	90,6	91,1	91,7	92,4	93,2	94,1	95,0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	54,1	56,0	57,8	59,6	61,4	63,2	65,0	66,8	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	20,0	20,1	20,6	20,9	21,1	21,3	21,6	22,3	(±)0,5
		164-170	22,0	22,1	22,6	22,9	23,1	23,3	23,6	24,3	
		176-182	23,0	23,1	23,6	23,9	24,1	24,3	24,6	25,3	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	16,6	17,2	17,7	18,0	18,6	19,3	20,0	20,6	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,7	17,0	17,3	17,6	18,0	18,5	19,2	20,0	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	11,5	11,7	12,0	12,2	12,5	12,8	13,1	13,3	(±)0,3
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	15,0	(±)0,3
11	Длина воротника по отлёту, см	все роста	57,4	58,6	60,0	61,2	62,6	63,8	65,2	66,6	(±)1,0

Продолжение Таблицы В18.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

1	Длина спинки посередине, см	152-158	80,8	81,3	81,8	82,8	83,8	84,8	85,8	86,8	(±)1,0
		164-170	86,8	87,3	87,8	88,8	89,8	90,8	91,8	92,8	
		176-182	89,8	90,3	90,8	91,8	92,8	93,8	94,8	95,8	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	40,5	41,2	41,8	42,4	43,0	43,6	44,2	44,8	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	86,9	87,9	88,9	90,0	91,0	92,0	93,0	94,0	(±)1,0
		164-170	92,9	93,9	94,9	96,0	97,0	98,0	99,0	100,0	
		176-182	95,9	96,9	97,9	99,0	100,0	101,0	102,0	103,0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	68,6	70,4	72,2	74,0	75,8	77,6	79,4	81,2	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	22,6	22,8	23,0	23,3	23,5	23,8	24,0	24,2	(±)0,5
		164-170	24,6	24,8	25,0	25,3	25,5	25,8	26,0	26,2	
		176-182	25,6	25,8	26,0	26,3	26,5	26,8	27,0	27,2	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	21,3	22,0	22,6	23,3	24,0	24,6	25,3	26,0	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	20,7	21,4	22,0	22,7	23,4	24,0	24,7	25,4	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	13,5	13,7	13,9	14,1	14,3	14,5	14,7	15,0	(±)0,3
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	15,0	15,0	15,3	15,3	15,3	15,9	15,9	15,9	(±)0,3
11	Длина воротника по отлёту, см	все роста	67,8	69,0	70,2	71,4	72,6	73,6	74,6	75,6	(±)1,0

В19. Халат медицинский женский модель 121-1.

Описание модели

Халат медицинский женский длиной выше колена; полуприлегающего силуэта, слегка расширенный книзу (расширение = 3,0 см); без воротника, с V-образным вырезом горловины, обработанным сзади обтачкой, а спереди притачными планками, состоящими из двух полосок разной ширины; с боковыми вставками «лампасами», стачанными из двух полосок разной ширины. Ширина планок горловины в готовом виде должна составлять 4,3-4,5см, а ширина боковых вставок – 6,0-6,2см.

Перед с отрезной кокеткой, шов притачивания которой проходит по линии груди; с горизонтальным подрезом ниже линии талии, в котором обработаны два боковых кармана. По краям карманов должны быть установленные на спецмашине закрепки.

Спинка с центральной застежкой на потайную тесьму-«молнию» в среднем шве; с рельефными швами, выходящими из верхних частей пройм и доходящими до низа.

Рукава втачные, одношовные, короткие, длиной выше локтя, с притачными манжетами шириной 3,4-3,6 см.

Планки горловины, боковые вставки – «лампасы» и мешковины карманов должны быть выполнены из отделочной гладкокрашеной ткани двух цветов.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

По горловине, кокетке, рельефам, горизонтальному подрезу переда, швам стачивания частей планок и «лампасов» и швам их притачивания должны быть проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 2,8-3,0 см от края.

В качестве фурнитуры рекомендуется использовать потайную тесьму-«молнию» длиной 60 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом основной и отделочных тканей.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

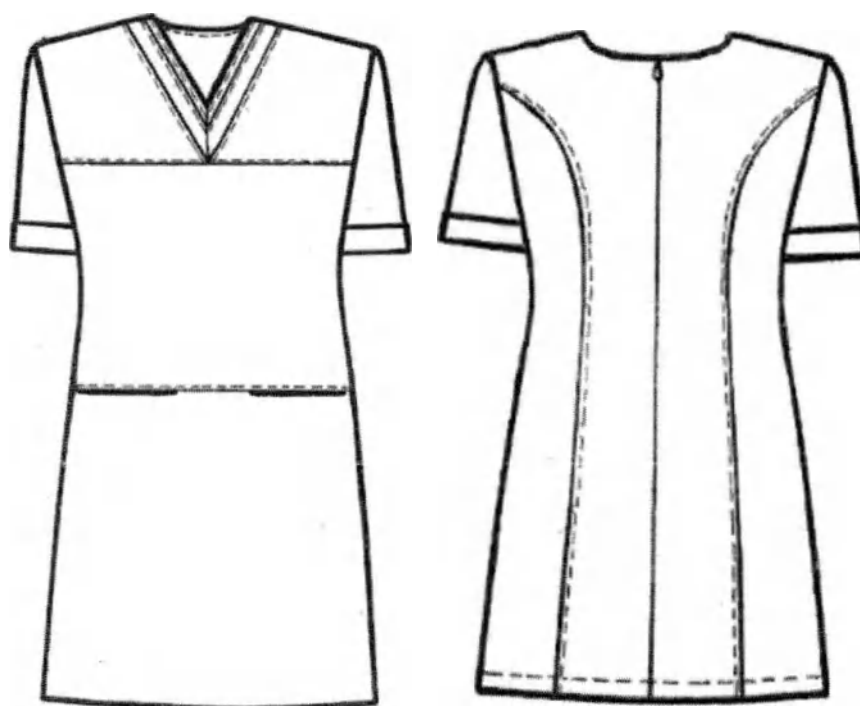


Рисунок В19–Халат медицинский женский модель 121-1

Таблица В19.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 121-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Верхняя часть переда	2	1
2	Средняя часть переда	1	0
3	Нижняя часть переда	1	0
4	Спинка	2	1
5	Бочок спинки	2	1
6	Рукав	2	1
7	Отворот рукава	2	1

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

8	Обтачка горловины переда	2	1
9	Обтачка горловины спинки	1	0
10	Мешковина кармана	2	1
	Отделочная ткань №1		
11	Широкая часть лампаса	2	1
12	Широкая часть планки горловины	2	1
13	Мешковина кармана	2	1
	Отделочная ткань №2		
14	Узкая часть лампаса	2	1
15	Узкая часть планки горловины	2	1
	ИТОГО	27	12

Таблица В19.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Халат медицинский женский модель 121-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	78,8	79,0	79,1	79,3	79,5	79,6	79,7	79,8	(±)1,0
		164-170	84,8	85,0	85,1	85,3	85,5	85,6	85,7	85,8	
		176-182	87,8	88,0	88,1	88,3	88,5	88,6	88,7	88,8	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	34,0	35,0	36,0	36,9	37,8	38,7	39,6	40,5	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	82,8	83,5	84,0	84,5	85,4	86,0	87,0	87,8	(±)1,0
		164-170	88,8	89,5	90,0	90,5	91,4	92,4	93,0	93,8	
		176-182	91,8	92,5	93,0	93,5	94,4	95,4	96,0	96,8	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	21,7	21,8	21,9	21,9	22,1	22,4	22,8	22,9	(±)1,0
		164-170	23,7	23,8	23,9	23,9	24,1	24,4	24,8	24,9	
		176-182	24,7	24,8	24,9	24,9	25,1	25,4	25,8	25,9	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	16,8	17,4	18,2	19,1	19,7	20,3	20,9	21,6	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,0	16,6	17,2	17,8	18,4	18,9	19,5	20,1	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	12,5	13,4	14,0	14,5	14,5	14,7	14,7	15,7	(±)0,3
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	(±)0,3

Продолжение Таблицы В19.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0	(±)1,0
		164-170	86,0	87,0	88,0	89,0	90,0	91,0	92,0	93,0	
		176-182	89,0	90,0	91,0	92,0	93,0	94,0	95,0	96,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	41,4	42,4	43,2	44,2	45,2	46,2	47,2	48,2	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	88,6	90,1	91,6	93,1	94,6	96,1	97,6	99,1	(±)1,0
		164-170	94,6	96,1	97,6	99,1	100,6	102,1	103,6	105,1	
		176-182	97,6	99,1	100,6	102,1	103,6	105,1	106,6	108,1	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	(±)1,0
5	Ширина изделия, см	все роста	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	84,0	(±)1,0

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

6	Длина рукава, см	152-158	23,0	23,2	23,4	23,7	23,9	24,1	24,6	25,2	(±)1,0
		164-170	25,0	25,2	25,4	25,7	25,9	26,1	26,6	27,2	
		176-182	26,0	26,2	26,4	26,7	26,9	27,1	27,6	28,2	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,2	22,9	23,6	24,4	25,3	26,2	27,2	28,2	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	20,8	21,5	22,3	23,1	24,0	24,8	25,8	26,8	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	15,7	15,7	15,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	(±)0,3
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	(±)0,3

В20. Халат медицинский женский модель 122-1.

Описание модели

Халат медицинский женский длиной до середины колена; полуприлегающего силуэта, слегка расширенный книзу (расширение 4,0см); со съёмным завязывающимся поясом и разрезами в боковых швах.

Перед с центральной бортовой застёжкой на 6 обметанных петель и 6 пуговиц; с отрезными кокетками; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа; с двумя верхними накладными карманами, передними срезами входящими в рельефные швы на уровне линии груди; с двумя нижними накладными карманами с фигурными входами, оформленными декоративными треугольными вставками. Передние срезы карманов должны входить в рельефные швы, а задние – в боковые швы. На уровне линии талии рядом с боковыми швами должны быть настроены две шлевки шириной 0,9-1,0см для фиксации пояса.

Спинка с отрезной кокеткой; с вертикальными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа.

Рукава втачные двухшовные, длинные; с притачными манжетами шириной 4,9-5,1см, застегивающимися на 1 обметанную петлю, и 1 пуговицу. Для регулировки длины с внутренней стороны каждого рукава посередине должна быть пришита пата с обметанной петлей на свободном конце, а с лицевой стороны в месте крепления паты должна быть пришита пуговица.

Воротник стояче-отложной, на отрезной стойке, застегивающейся на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу.

По краям бортов, манжет, воротника, рельефным швам, линиям входа в карманы и швам их притачивания должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8см от края или шва.

На рукавах в месте крепления пат должны быть проложены строчки в виде квадратов со стороной 3,2-3,4см и крестообразные.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

По разрезам, швам притачивания воротника, стойки и манжет должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

В качестве фурнитуры рекомендуется использовать пуговицы диаметром 1,5-1,7см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.



Рисунок В20– Халат медицинский женский модель 122-1

Таблица В20.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 122-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет. кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	1	0
4	Бочок спинки	2	1
5	Кокетка спинки	1	0
6	Передняя часть рукава	2	1
7	Задняя часть рукава	2	1
8	Верхний карман	2	1
9	Нижний карман	2	1
10	Вставка нижнего кармана	2	1
11	Манжета	2	1
12	Воротник	2	1
13	Стойка воротника	2	1
14	Пояс	2	1
15	Пата рукава	2	1

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
16	Деталь под пату	2	1
17	Шлёвки	1	0
18	Подборт	2	1
19	Обтачка кармана	2	1
20	Кокетка полочки	2	1
	ИТОГО	35	17

Таблица В20.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 122-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	85,5	85,8	86,3	86,7	87,1	87,5	88,0	88,5	(±)1,0
		164-170	91,5	91,8	92,3	92,7	93,1	93,5	94,0	94,5	
		176-182	94,5	94,8	95,3	95,7	96,1	96,5	97,0	97,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	87,8	88,6	89,5	90,4	91,3	92,1	92,9	93,7	(±)1,0
		164-170	93,8	94,6	95,5	96,4	97,3	98,1	98,9	99,7	
		176-182	96,8	97,6	98,5	99,4	100,3	101,1	101,9	102,7	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,5	46,5	48,5	50,6	52,7	54,8	56,9	59,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	56,5	58,3	60,2	62,1	64,0	66,0	68,0	70,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	57,9	58,0	58,3	58,6	58,7	59,0	59,2	59,4	(±)1,0
		164-170	61,9	62,0	62,3	62,6	62,7	63,0	63,2	63,4	
		176-182	65,9	66,0	66,3	66,6	66,7	67,0	67,2	67,4	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	18,0	18,6	19,2	19,8	20,4	21	21,6	22,2	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	9,2	9,4	9,6	9,8	10,0	10,3	10,5	10,7	(±)0,5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	7,8	8,0	8,2	8,5	8,8	9,0	9,1	9,5	(±)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	11,3	11,5	11,6	11,8	12,1	12,5	12,7	13,1	(±)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	13,5	14,2	15,0	15,8	16,6	17,4	18,2	19,0	(±)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	(±)0,3
13	Длина воротника по отлёту, см	все роста	45,8	46,8	47,9	49,0	50,0	51,1	52,1	53,2	(±)0,5

Продолжение Таблицы В20.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	88,8	89,1	89,4	89,7	90,0	90,5	90,6	90,9	(±)1,0
		164-170	94,8	95,1	95,4	95,7	96,0	96,5	96,6	96,9	
		176-182	97,8	98,1	98,4	98,7	99,0	99,5	99,6	99,9	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43.4	44.3	45.2	46.0	46.8	47.7	48.6	49.4	(+/-)0.5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	94.6	95.5	96.4	97.3	98.2	99.1	100.0	100.9	(±)1.0
		164-170	100.6	101.5	102.4	103.3	104.2	105.1	106.0	106.9	
		176-182	103.6	104.5	105.4	106.3	107.2	108.1	109.0	109.9	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	61.1	63.2	65.4	67.6	69.8	72.0	74.2	76.4	(+/-)1.0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	72.0	74.0	76.0	78.0	80.0	82.0	84.0	86.0	(+/-)1.0
6	Длина рукава, см	152-158	59.5	59.7	59.8	60.0	60.1	60.3	60.4	60.5	(±)1.0
		164-170	63.5	63.7	63.8	64.0	64.1	64.3	64.4	64.5	
		176-182	67.5	67.7	67.8	68.0	68.1	68.3	68.4	68.5	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22.8	23.5	24.3	25.0	25.7	26.4	27.2	28.0	(+/-)0.5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	10.8	11.0	11.2	11.4	11.5	11.7	11.9	12.0	(+/-)0.5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5	10.7	11.0	11.2	(+/-)0.3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	(+/-)0.3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	19.7	20.4	21.0	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	(+/-)0.3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	19.2	19.2	19.2	19.5	19.5	19.5	20.0	20.0	(+/-)0.3
13	Длина воротника по отлёту, см	все роста	54.2	55.2	56.2	57.2	58.2	59.2	60.2	61.2	(+/-)0.5

В21. Халат медицинский женский модель 123-1.

Описание модели

Халат медицинский женский укороченный (длиной до середины бедра); полуприлегающего силуэта, слегка расширенный книзу (расширение = 3,5 см); с разрезами в боковых швах; без воротника, с фигурным вырезом горловины, обработанным обтачкой.

Перед с центральной бортовой застёжкой до верха на 8 парно расположенных кнопок; с отрезными кокетками; с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с двумя верхними накладными карманами, передние срезы которых входят в рельефные швы на уровне линии груди а верхние края обработаны планками; с двумя нижними боковыми накладными карманами, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы, а верхние края наклонные и обработаны планками.

Спинка с отрезной кокеткой дугообразной формы; с вертикальными рельефами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа изделия; с двумя полупоясами, одним концом вшитыми в боковые швы на уровне линии талии и скреплёнными посередине спинки с помощью кнопки.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Рукава втачные, одношовные. длинные, с притачными манжетами, разрезными посередине рукава.

По рельефам, кокеткам, горловине, краям бортов, манжет, нижним краям полупоясов, швам притачивания манжет и планок карманов, а также по швам настрачивания карманов должны быть проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1-1,2 см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

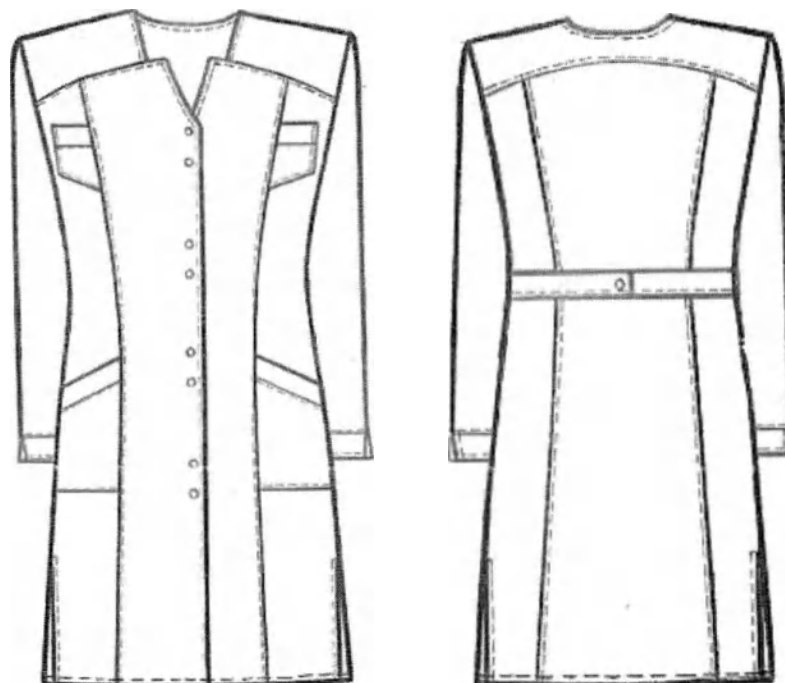


Рисунок В21– Халат медицинский женский модель 123-1

Таблица В21.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 123-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Кокетка полочки	2	1
4	Спинка	1	0
5	Бочок спинки	2	1

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

6	Кокетка спинки	1	0
7	Рукав	2	1
8	Манжета	2	1
9	Верхний карман	2	1
10	Планка верхнего кармана	2	1
11	Нижний карман	2	1
12	Планка нижнего кармана	2	1
13	Полупояс	2	1
14	Подборт	2	1
15	Обтачка горловины переда	2	1
16	Обтачка горловины спинки	1	0
	Итого	29	13

Таблица В21.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 123-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	80,4	80,9	81,5	82,0	82,4	82,8	83,2	83,6	(±)1,0
		164-170	86,4	86,9	87,5	88,0	88,4	88,8	89,2	89,6	
		176-182	89,4	89,9	90,5	91,0	91,4	91,8	92,2	92,6	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	34,5	35,7	36,8	38,0	39,2	40,5	41,5	42,5	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	83,4	84,3	85,0	85,8	86,7	87,6	88,5	89,5	(±)1,0
		164-170	89,4	90,3	91,0	91,8	92,7	93,6	94,5	95,5	
		176-182	92,4	93,3	94,0	94,8	95,7	96,6	97,5	98,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	56,5	56,5	56,6	56,7	56,7	56,9	57,0	57,1	(±)1,0
		164-170	60,5	60,5	60,6	60,7	60,7	60,9	61,0	61,1	
		176-182	62,5	62,5	62,6	62,7	62,7	62,9	63,0	63,1	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,2	17,8	18,5	19,1	19,8	20,6	21,3	22,0	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	13,7	14,0	14,2	14,5	14,8	15,0	15,3	15,5	(±)0,5
9	Ширина верхнего кармана по верхнему краю, см	все роста	5,7	5,8	5,9	6,0	6,3	6,4	6,6	6,8	(±)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	11,2	11,8	12,0	12,1	12,7	12,9	13,1	13,2	(±)0,3
11	Ширина нижнего кармана по нижнему краю, см	все роста	15,7	16,5	17,2	17,9	18,8	19,5	20,4	21,3	(±)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	21,0	21,3	21,3	22,0	21,8	22,4	22,5	22,6	(±)0,3

Продолжение Таблицы В21.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	83.8	84.0	84.2	84.5	84.8	85.0	85.3	85.5	(±)1.0
		164-170	89.8	90.0	90.2	90.5	90.8	91.0	91.3	91.5	
		176-182	92.8	93.0	93.2	93.5	93.8	94.0	94.3	94.5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43.5	44.4	45.3	46.2	47.1	48.0	48.9	49.8	(±)0.5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	90.4	91.3	92.2	93.1	94.0	94.8	95.7	96.6	(±)1.0
		164-170	96.4	97.3	98.2	99.1	100.0	100.8	101.7	102.6	
		176-182	99.4	100.3	101.2	102.1	103.0	103.8	104.7	105.6	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60.2	62.4	64.6	66.8	69.0	71.3	73.5	75.8	(±)1.0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полуканоса застёжки), см	все роста	71.2	73.4	75.6	77.8	80.0	82.3	84.5	86.8	(±)1.0
6	Длина рукава, см	152-158	57.1	57.3	57.4	57.5	57.6	57.7	57.8	57.9	(±)1.0
		164-170	61.1	61.3	61.4	61.5	61.6	61.7	61.8	61.9	
		176-182	63.1	63.3	63.4	63.5	63.6	63.7	63.8	63.9	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22.8	23.5	24.2	24.9	25.5	26.1	26.7	27.3	(±)0.5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15.8	16.1	16.4	16.6	16.8	17.0	17.2	17.5	(±)0.5
9	Ширина верхнего кармана по верхнему краю, см	все роста	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	(±)0.3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	13.3	13.3	13.3	13.4	13.4	13.5	13.5	13.5	(±)0.3
11	Ширина нижнего кармана по нижнему краю, см	все роста	22.1	22.9	23.8	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	(±)0.3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	22.7	22.8	22.8	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	(±)0.3

В22. Халат медицинский женский модель 126-1.

Описание модели

Халат медицинский женский длиной до колена, полуприлегающего силуэта, слегка расширенный книзу (расширение -3,5 см); с разрезами в боковых швах.

Перед с центральной бортовой застёжкой на 6 кнопок, V-образным вырезом горловины; с закругленными подрезами, выходящими из плечевых швов рядом с горловиной, и заканчивающимися в верхней части проймы; с дугообразными подрезами, выходящими из боковых швов ниже уровня талии на 21,0 см, и доходящими до низа изделия; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов верхних подрезов и доходящими до швов нижних подрезов; с двумя верхними накладными карманами, передние боковые срезы которых входят в рельефные швы на уровне линии груди; с двумя нижними карманами, обработанными в швах дугообразных подрезов на боковых частях переда ниже уровня талии.

Спинка с закругленными подрезами, выходящими из плечевых швов рядом с горловиной и заканчивающимися в верхней части проймы; с дугообразными подрезами, выходящими из боковых швов ниже уровня талии на 21,0 см и доходящими до низа

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA⁴ по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

изделия; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов верхних подрезов; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скреплёнными посередине спинки с помощью кнопки. Для регулировки степени прилегания изделия по талии на правом полупоясе должны быть установлены две нижних части кнопки с расстоянием 2,5 см.

Рукава втачные, одношовные, длиной $\frac{3}{4}$. Параллельно нижнему краю рукавов застрочен зашип глубиной 0,6 – 0,7 см, имитирующий отложные манжеты шириной 3,4 – 3,6 см.

Воротник – стойка с закруглёнными концами, не доходящая до углов борта

По рельефам, подрезам, краям бортов и воротника, горловине переда, низу рукавов, верхним краям карманов и поясам (со всех сторон) должна быть проложена отделочная строчка на расстоянии 0,6 – 0,7 см от края или шва.


По швам настрачивания верхних карманов, разрезам и шву втачивания воротника в горловину спинки должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1 – 0,2 см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,1 – 1,3 см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

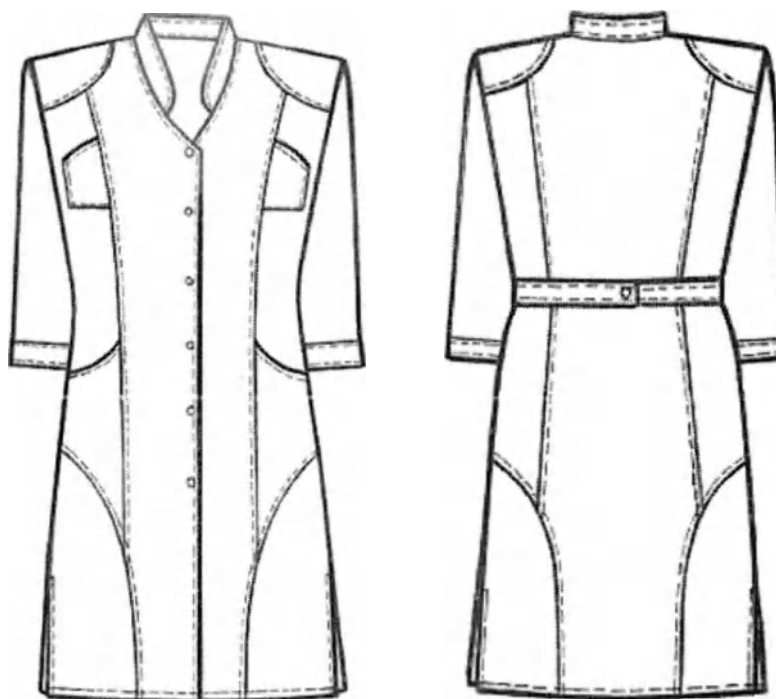

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 114 из 529

Рисунок В22 – Халат медицинский женский модель 126-1

Таблица В22.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 126-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Верхняя часть бочка полочки	2	1
3	Средняя часть бочка полочки	2	1
4	Нижняя часть бочка полочки	2	1
5	Плечевая вставка полочки	2	1
6	Спинка	1	0
7	Верхняя часть бочка спинки	2	1
8	Нижняя часть бочка спинки	2	1
9	Плечевая вставка спинки	2	1
10	Верхний карман	2	1
11	Мешковина нижнего кармана	2	1
12	Рукав	2	1
13	Воротник	2	1
14	Полупояс	2	1
15	Подборт	2	1
16	Обтачка верхнего кармана	2	1
Итого		31	15

Таблица 22.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 126-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	90,5	91,0	91,5	92,0	92,5	92,9	93,2	93,5	(±)1,0
		164-170	96,5	97,0	97,5	98,0	98,5	98,9	99,2	99,5	
		176-182	99,5	100,0	100,5	101,0	101,5	101,9	102,2	102,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	92,9	93,8	94,5	95,3	96,2	97,1	98,0	99,0	(±)1,0
		164-170	98,9	99,8	100,5	101,3	102,2	103,1	104,0	105,0	
		176-182	101,9	102,8	103,5	104,3	105,2	106,1	107,0	108,0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	40,6	40,8	41,0	41,2	41,3	41,6	41,8	42,1	(±)1,0
		164-170	43,6	43,8	44,0	44,2	44,3	44,6	44,8	45,1	
		176-182	45,1	45,3	45,5	45,7	45,8	46,1	46,3	46,6	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	16,4	17,2	18,0	18,8	19,6	20,4	21,2	22,0	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,7	16,0	16,3	16,5	16,8	17,0	17,3	17,6	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю. см	все роста	9.0	9.1	9.3	9.5	9.6	9.8	9.9	10.1	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю. см	все роста	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	14.0	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа. см	все роста	13.6	14.3	15.0	15.6	16.3	17.0	17.7	18.6	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана. см	все роста	21.9	22.0	22.0	22.1	22.2	22.3	22.6	22.8	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлёту. см	все роста	43.5	44.5	45.5	46.5	47.5	48.5	49.5	50.5	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В22.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск. см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине. см	152-158	93.8	94.0	94.2	94.5	94.8	95.0	95.2	95.5	(+/-)1.0
		164-170	99.8	100.0	100.2	100.5	100.8	101.0	101.2	101.5	
		176-182	102.8	103.0	103.2	103.5	103.8	104.0	104.2	104.5	
2	Ширина спинки в самом узком месте. см	все роста	43.4	44.3	45.2	46.0	46.8	47.7	48.6	49.5	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа. см	152-158	99.9	100.8	101.7	102.6	103.5	104.3	105.2	106.1	(+/-)1.0
		164-170	105.9	106.8	107.7	108.6	109.5	110.3	111.2	112.1	
		176-182	108.9	109.8	110.7	111.6	112.5	113.3	114.2	115.1	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы. см	все роста	60.2	62.5	64.8	67.2	69.6	72.0	74.5	76.8	(+/-)1.0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки). см	все роста	72.2	74.5	76.8	79.2	81.6	84.0	86.5	88.5	(+/-)1.0
6	Длина рукава. см	152-158	42.2	42.4	42.6	42.9	43.1	43.3	43.5	43.8	(+/-)1.0
		164-170	45.2	45.4	45.6	45.9	46.1	46.3	46.5	46.8	
		176-182	46.7	46.9	47.1	47.4	47.6	47.8	48.0	48.3	
7	Ширина рукава под проймой. см	все роста	22.8	23.5	24.2	24.9	25.5	26.1	26.7	27.3	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу. см	все роста	17.8	18.1	18.4	18.8	19.2	19.6	20.0	20.5	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю. см	все роста	10.3	10.5	10.7	10.8	11.0	11.2	11.4	11.6	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю. см	все роста	14.2	14.3	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа. см	все роста	19.6	20.5	21.5	22.3	23.2	24.0	24.9	25.8	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана. см	все роста	23.0	23.0	23.0	23.2	23.2	23.3	23.3	23.4	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлёту. см	все роста	51.5	52.5	53.5	54.5	55.5	56.5	57.5	58.5	(+/-)0,5

В23. Халат медицинский женский модель 127-1.

Описание модели

Халат медицинский женский длиной до колена; полуприлегающего силуэта.

Перед с комбинированной бортовой застёжкой; от линии груди и до низа – центральная, на 5 кнопок, выше линии груди – смещённая на 2 кнопки; с притачными кокетками, с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа; с двумя косыми подрезами, выходящими из нижней части

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

пройм и заканчивающимися в рельефных швах ниже линии талии; с двумя верхними накладными карманами, передним срезом входящими в рельефные швы на уровне линии груди, с двумя нижними накладными карманами с наклонным входом передние боковые срезы которых входят в швы подрезов и рельефные швы, задние срезы входят в боковые швы, а верхние края обработаны притачными планками шириной 4,0-4,2см.

Спинка с притачной кокеткой, вертикальными рельефными швами выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа, с двумя косыми подрезами выходящими из нижней части пройм и заканчивающимися в рельефных швах ниже линии талии, с двумя полупоясами вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скрепленными посередине спинки с помощью кнопки. Для регулировки установлены 2 нижние части кнопки с расстоянием 2,5см.

Рукава втачные, одношовные, длиной $\frac{3}{4}$, с притачными манжетами шириной 4,2-4,4см.

Воротник – стойка, спереди правый конец стойки запахивается на левую полочку и прикрепляется к ней с помощью кнопки.

По краям борта, воротника, кокеткам, рельефам, подрезам, швам притачивания планок карманов и манжет, шву втачивания воротника в горловину и швам настрачивания карманов проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края.

По линиям входа в верхние карманы проложена строчка на расстоянии 1,4-1,6 см от края. По низу изделия проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

Фурнитура – металлические кнопки диаметром 1,1-1,3 см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.



Рисунок В23– Халат медицинский женский модель 127-1

Таблица В23.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 127-1

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Верхняя часть бочка полочки	2	1
3	Нижняя часть бочка полочки	2	1
4	Кокетка полочки	2	1
5	Спинка	1	0
6	Верхняя часть бочка спинки	2	1
7	Нижняя часть бочка спинки	2	1
8	Кокетка спинки	1	0
9	Рукав	2	1
10	Манжета	2	1
11	Верхний карман	2	1
12	Нижний карман	2	1
13	Планка нижнего кармана	2	1
14	Воротник	2	1
15	Полупояс	2	1
16	Подборт	2	1
Итого		30	14

Таблица В23.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 127-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	93,0	93,5	94,0	94,5	95,0	95,5	95,8	96,0	(±)1,0
		164-170	99,0	99,5	100,0	100,5	101,0	101,5	101,8	102,0	
		176-182	102,0	102,5	103,0	103,5	104,0	104,5	104,8	105,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,4	42,3	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	97,0	97,8	98,6	99,4	100,2	101,0	101,7	102,3	(±)1,0
		164-170	103,0	103,8	104,6	105,4	106,2	107,0	107,7	108,3	
		176-182	106,0	106,8	107,6	108,4	109,2	110,2	110,7	111,3	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,0	46,0	48,1	50,2	52,3	54,5	56,6	58,8	(±)01,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,2	69,2	71,2	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	41,7	41,9	42,2	42,4	42,7	42,9	43,1	43,3	(±)1,0
		164-170	44,7	44,9	45,2	45,4	45,7	45,9	46,1	46,3	
		176-182	46,2	46,4	46,7	46,9	47,2	47,4	47,6	47,8	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,1	17,8	18,4	19,0	19,7	20,5	21,3	22,1	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,4	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,5	(±)0,5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	7,4	7,6	7,9	8,1	8,3	8,5	8,8	9,1	(±)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	11,4	11,6	11,8	12,0	12,1	12,3	12,4	12,6	(±)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

11	Ширина Нижнего кармана по линии входа, см	все роста	15,7	16,4	17,1	17,9	18,6	19,3	20,0	20,8	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	20,5	20,6	20,8	21,1	21,3	21,5	21,6	21,7	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлёту, см	все роста	61,0	62,0	63,2	64,5	65,8	67,2	68,4	69,6	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В23.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	96,2	96,3	96,4	96,5	96,6	96,7	97,0	97,3	(+/-)1,0
		164-170	102,2	102,3	102,4	102,5	102,6	102,7	103,0	103,3	
		176-182	105,2	105,3	105,4	105,5	105,6	105,7	106,0	106,3	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,2	44,1	45,0	45,8	46,6	47,4	48,2	49,0	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	103,0	103,7	104,4	105,2	106,0	106,8	107,8	108,8	(+/-)1,0
		164-170	109,0	109,7	110,4	111,2	112,0	112,8	113,8	114,8	
		176-182	112,0	112,7	113,4	114,2	115,0	115,8	116,8	117,8	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,9	63,0	65,1	67,2	69,3	71,4	73,5	75,6	(+/-)0,1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	73,3	75,3	77,4	79,4	81,5	83,5	85,5	87,5	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	43,4	43,5	43,7	44,0	44,3	44,5	44,7	44,9	(+/-)1,0
		164-170	46,4	46,5	46,7	47,0	47,3	47,5	47,7	47,9	
		176-182	47,9	48,0	48,2	48,5	48,8	49,0	49,2	49,4	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,8	23,6	24,3	25,0	25,7	26,3	27,0	27,6	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	18,0	18,5	19,0	19,4	19,8	20,3	20,8	21,2	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	9,4	9,6	9,8	10,1	10,4	10,7	11,0	11,3	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,8	12,9	13,1	13,3	13,5	13,7	14,0	14,4	(+/-)0,3
11	Ширина Нижнего кармана по линии входа, см	все роста	21,6	22,4	21,3	21,7	22,1	22,4	22,6	22,7	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	21,8	21,9	21,5	21,7	21,9	22,0	22,1	22,2	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлёту, см	все роста	70,8	72,0	73,0	74,00	75,00	76,0	77,0	78,0	(+/-)0,5

В24. Халат медицинский женский модель 128-1.

Описание модели

Халат медицинский женский длиной ниже колена с разрезами в боковых швах; полуприлегающего силуэта, слегка расширенный книзу (расширение = 3,0 см); без воротника, с V-образным вырезом горловины, обработанным обтачкой сзади и на левой полочке, а на правой полочке – тремя параллельными планками шириной 2,8-3,0 см. Первая и третья планки должны быть выполнены из отделочной ткани, а вторая – из основной.

Перед с центральной бортовой застежкой на 8 обметанных петель и 8 пуговиц; с рельефными швами, выходящими из пройм и доходящими до низа; с одним верхним

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

накладным карманом, передним боковым срезом входящим в рельефный шов левой полочки; с двумя нижними накладными карманами с наклонным входом, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы, а верхние срезы обработаны планками шириной 2,8-3,0 см. Линия входа верхнего кармана должна быть обработана подгибкой шириной 2,0-2,2 см, застроченной на лицевую сторону.

Спинка с рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа, с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне талии и завязывающимися посередине спинки.

Рукава втачные, одношовные, длиной выше локтя. Низ рукавов должен быть оформлен подгибкой шириной 3,9-4,1 см, застроченной на лицевую сторону.

По горловине, краям бортов, швам притачивания планок горловины, швам застрачивания поясов, подгибки рукавов и планок карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По швам настрачивания верхнего и нижних карманов должна быть проложена двойная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см от шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,5-1,7 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться пластиковые пуговицы диаметром 1,7-1,9 см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

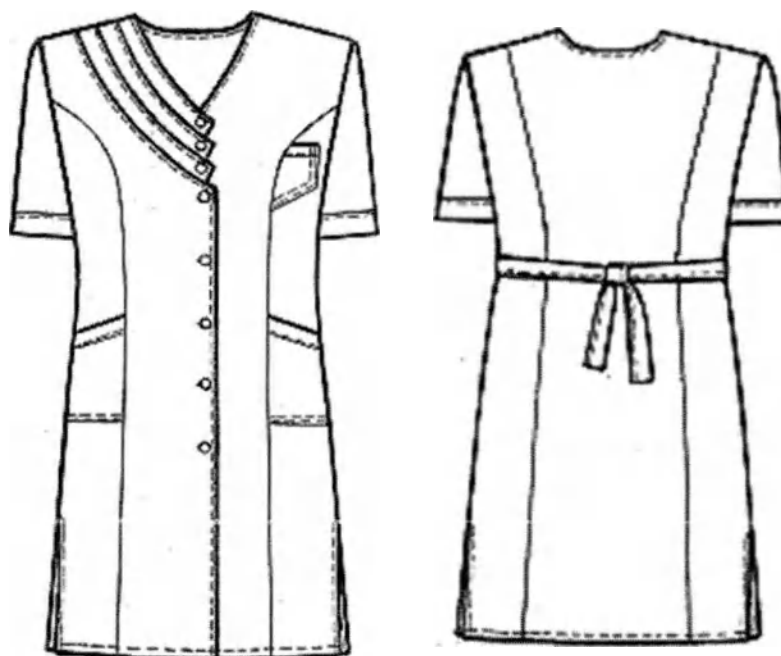


Рисунок В24— Халат медицинский женский модель 128-1

Таблица В24.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 128-

1

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 120 из 529

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань:			
1	Правая полочка	1	0
2	Левая полочка	1	0
3	Бочок полочки	2	1
4	Спинка	1	0
5	Бочок спинки	2	1
6	Рукав	2	1
7	Верхний карман	1	0
8	Нижний карман	2	1
9	Полупояс	2	1
10	Планка нижнего кармана	2	1
11	Подборт правой полочки	1	0
12	Подборт левой полочки	1	0
13	Обтачка горловины спинки	1	0
14	Планка горловины №2	2	1
Отделочная ткань:			
15	Планка горловины №1	2	1
16	Планка горловины №3	2	1
Клеевая:			
17	Планка горловины №1	1	0
18	Планка горловины №2	1	0
19	Планка горловины №3	1	0
Итого		28	9

Таблица В24.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 128-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	96,0	96,3	96,8	97,1	97,7	98,2	98,4	98,7	(±)1,0
		164-170	102,0	102,3	102,8	103,1	103,7	104,2	104,4	104,7	
		176-182	105,0	105,3	105,8	106,1	106,7	107,2	107,4	107,7	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	36,0	36,9	37,8	38,7	39,6	40,4	41,2	42,0	(±)1,0
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	98,2	99,0	100,2	101,0	102,0	103,0	103,5	104,3	(±)1,0
		164-170	104,2	105,0	106,2	107,0	108,0	109,0	109,5	110,3	
		176-182	107,2	108,0	109,2	110,0	111,0	112,0	112,5	113,3	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,5	46,5	48,5	50,7	52,8	54,9	57,0	59,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	55,0	57,2	59,4	61,8	64,0	66,2	68,4	70,5	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	23,0	23,2	23,5	23,9	24,0	24,1	24,2	24,2	(±)1,0
		164-170	25,0	25,2	25,5	25,9	26,0	26,1	26,2	26,2	
		176-182	26,0	26,2	26,5	26,9	27,0	27,1	27,2	27,2	

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17.0	17.6	18.2	18.8	19.4	20.0	20.6	21.5	(+/-)0.5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16.3	16.8	17.3	17.8	18.3	18.9	19.4	20.4	(+/-)0.5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	5.0	5.1	5.6	5.7	5.9	6.0	6.1	6.2	(+/-)0.5
10	Глубина верхнего кармана по перед-нему краю, см	все роста	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.6	12.7	(+/-)0.5
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	13.7	14.5	15.2	16.1	16.9	17.7	18.5	19.2	(+/-)0.5
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	19.6	19.7	19.8	19.8	19.8	19.8	19.9	19.9	(+/-)0.5

Продолжение Таблицы В24.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	100.3	101.3	102.5	103.5	104.9	106.5	107.0	108.2	(+)1.0
		164-170	106.3	107.3	108.5	109.5	110.9	112.5	113.0	114.2	
		176-182	109.3	110.3	111.5	112.5	113.9	115.5	116.0	117.2	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	42.8	43.6	44.4	45.2	46.0	46.7	47.4	48.2	(+)1.0
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	106.5	108.1	110.1	111.7	113.7	115.9	117.0	118.8	(+)1.0
		164-170	112.5	114.1	116.1	117.7	119.7	121.9	123.0	124.8	
		176-182	115.5	117.1	119.1	120.7	122.7	124.9	126.0	127.8	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	61.2	63.4	65.6	67.8	70.0	72.2	74.4	76.6	(+)1.0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	72.7	74.9	77.1	79.3	81.5	83.5	85.5	87.5	(+)1.0
6	Длина рукава, см	152-158	24.3	24.7	24.8	25.2	26.0	26.8	27.3	27.5	(+)1.0
		164-170	26.3	26.7	26.8	27.2	28.0	28.8	29.3	29.5	
		176-182	27.3	27.7	27.8	28.2	29.0	29.8	30.3	30.5	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22.6	23.6	24.5	25.1	25.8	26.4	27.0	27.9	(+)0.5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	21.4	22.3	23.2	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	(+)0.5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	6.3	6.4	6.7	7.0	7.5	7.6	7.7	7.7	(+)0.5
10	Глубина верхнего кармана по перед-нему краю, см	все роста	12.8	12.9	13.1	13.5	14.0	14.2	14.3	14.5	(+)0.5
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	20.0	21.0	22.0	21.1	21.2	21.3	21.8	22.0	(+)0.5
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	20.4	(+)0.5

В25. Халат медицинский женский модель 128С.

Описание изделия

Халат медицинский женский из белой ткани длиной до колен, отрезной по линии талии; полуприлегающего силуэта, слегка расширенный к низу (расширение равно 5,0см)

Перед с центральной бортовой застёжкой на 9 кнопок(борта должны быть обработаны планками шириной 3,5 см); с отрезными кокетками выше линии груди; с двумя вертикальными нагрудными вытачками, выходящими из шва по линии талии; с двумя

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

вертикальными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и заканчивающимися в шве по линии талии; с двумя мягкими складками на нижней части переда, заложенными под нагрудными вытачками; с двумя вертикальными швами на нижней части переда, продолжающими линии швов верхней части переда, выходящими из шва по линии талии и доходящими до низа; с двумя карманами в этих швах, расположенными на 8,0 см ниже талии. На краях входов в карманы должны быть закрепки, установленные на спецмашине. На кокетку левой полочки может быть настрочен логотип с фирменной символикой.

Спинка с отрезной кокеткой выше уровня лопаток; с двумя вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до шва по линии талии; с двумя вертикальными швами на нижней части спинки, выходящими из шва по линии талии и доходящими до низа.

Рукава втачные, одношовные, длинные или 3/4 (по желанию заказчика).

Низ рукавов должен быть обработан подгибкой шириной 3,5 см.

Воротник- стойка шириной 3,3-3,5 см, с закругленными углами.

По кокеткам, рельефам, шву по линии талии, краям планок и воротника должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,0-1,2 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки белого цвета.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.



Рисунок В25- Халат медицинский женский модель 128С

Таблица В25.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 128С

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	1	0
4	Бочок спинки	2	1
5	Нижняя часть полочки	2	1
6	Нижняя часть бочка полочки	2	1
7	Нижняя часть спинки	1	0
8	Нижняя часть бочка спинки	2	1
9	Планка застежки	2	1
10	Кокетка полочки	2	1
11	Кокетка спинки	1	0
12	Мешковина кармана	4	2
13	Воротник	2	1
14	Рукав	2	1
	Итого:	27	12

Таблица В25.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 128С

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	85.3	85.8	86.3	86.8	87.3	87.7	88.2	88.6	(±1)
		164-170	91.3	91.8	92.3	92.8	93.3	93.7	94.2	94.6	
		176-182	94.3	94.8	95.3	95.8	96.3	96.7	97.2	97.6	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35.3	36.3	37.4	38.5	39.5	40.5	41.3	42.0	(±0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	88.2	89.1	90.0	90.8	91.6	92.3	93.2	93.9	(±1)
		164-170	94.2	95.1	96.0	96.8	97.6	98.3	99.2	99.9	
		176-182	97.2	98.1	99.0	99.8	100.6	101.3	102.2	102.9	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	45.0	47.0	49.0	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	(±1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	77.0	(±1)
6	Длина рукава, см	152-158	53.2	53.4	53.6	53.8	54.0	54.2	54.4	54.6	(±1.0)
		164-170	57.2	57.4	57.6	57.8	58.0	58.2	58.4	58.6	
		176-182	59.2	59.4	59.6	59.8	60.0	60.2	60.4	60.6	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	18.2	18.7	19.3	19.9	20.5	21.1	21.8	22.5	(±0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	12.7	12.9	13.2	13.5	13.7	13.9	14.1	14.3	(±0.5)
9	Длина входа в карман, см	все роста	14.3	14.4	14.4	15.0	15.0	15.0	15.5	15.5	(±0.5)
10	Длина воротника по отлету, см	все роста	38.0	38.8	39.6	40.4	41.2	42.0	43.0	44.0	(±0.3)

Продолжение Таблицы В25.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	89.0	89.4	89.8	90.2	90.6	91.0	91.4	91.8	(±1)
		164-170	95.0	95.4	95.8	96.2	96.6	97.0	97.4	97.8	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA* по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
		176-182	98,0	98,4	98,8	99,2	99,6	100,0	100,4	100,8	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	42,9	43,8	44,7	45,6	46,5	47,3	48,1	48,9	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	95,0	96,0	97,0	98,0	99,0	100,0	101,0	102,0	(+/-1)
		164-170	101,0	102,0	103,0	104,0	105,0	106,0	107,0	108,0	
		176-182	104,0	105,0	106,0	107,0	108,0	109,0	110,0	111,0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	61,1	63,2	65,3	67,4	69,5	71,6	73,7	75,8	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	79,0	81,0	83,0	85,0	87,0	89,0	91,0	93,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	152-158	54,8	55,0	55,2	55,4	55,6	55,8	56,0	56,2	(+/-1,0)
		164-170	58,8	59,0	59,2	59,4	59,6	59,8	60,0	60,2	
		176-182	60,8	61,0	61,2	61,4	61,6	61,8	62,0	62,2	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	23,3	24,2	25,0	25,8	26,5	27,0	27,6	28,2	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	14,4	14,7	15,0	15,3	15,6	15,9	16,1	16,3	(+/-0,5)
9	Длина входа в карман, см	все роста	15,5	16,0	16,0	16,0	16,5	16,5	16,5	16,5	(+/-0,5)
10	Длина воротника по отлету, см	все роста	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	(+/-0,3)

В26. Халат медицинский женский модель 129-1.

Описание модели

Халат медицинский женский из белой ткани, укороченный (длиной до середины бедра); полуприлегающего силуэта, слегка расширенный к низу (расширение равно 3,0 см); с разрезами в боковых швах.

Перед с центральной бортовой застежкой до верха на 7 кнопок; отрезной по линии талии; с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до шва соединения верхней и нижней частей переда; с двумя боковыми накладными карманами, задние срезы которых входят в боковые швы, а верхний край входит в шов соединения верхней и нижней частей переда. Входы в карманы закругленные, выходят из шва соединения верхней и нижней частей переда и заканчиваются в боковых швах.

Спинка с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа.

Рукава втачные, одношовные, длинные. Низ рукавов должен быть оформлен притачными манжетами шириной 5,0-5,2 см.

Воротник-стойка.

По краям воротника, бортов, разрезов, манжет, входам в карманы, швам втачивания воротника в горловину спинки, притачивания манжет, соединения верхней и нижней частей переда и швам настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В качестве фурнитуры должны использоваться кнопки диаметром 1,0-1,2 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки белого цвета.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.



Рисунок В26– Халат медицинский женский модель 129-1

Таблица В26.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 129-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет. кроя	Кол-во зеркально
1	Верхняя часть полочки	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Нижняя часть полочки	2	1
4	Спинка	1	0
5	Бочок спинки	2	1
6	Рукав	2	1
7	Воротник	2	1
8	Манжета	2	1
9	Карман	2	1
10	Обтачка кармана	2	1
11	Подборт	2	1
	ИТОГО	20	10

Таблица В26.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 129-1

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	80,4	80,9	81,5	82,0	82,4	82,8	83,2	83,6	(±)1,0
		164-170	86,4	86,9	87,5	88,0	88,4	88,8	89,2	89,6	
		176-182	89,4	89,9	90,5	91,0	91,4	91,8	92,2	92,6	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	34,5	35,7	36,8	38,0	39,2	40,5	41,5	42,5	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	83,4	84,3	85,0	85,8	86,7	87,6	88,5	89,5	(±)1,0
		164-170	89,4	90,3	91,0	91,8	92,7	93,6	94,5	95,5	
		176-182	92,4	93,3	94,0	94,8	95,7	96,6	97,5	98,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	57,1	57,3	57,5	57,6	57,8	58,0	58,1	58,2	(±)1
		164-170	61,1	61,3	61,5	61,6	61,8	62,0	62,1	62,2	
		176-182	63,1	63,3	63,5	63,6	63,8	64,0	64,1	64,2	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,1	17,8	18,5	19,1	19,8	20,6	21,3	22,0	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	13,0	13,3	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7	14,9	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по нижнему краю, см	все роста	16,6	17,4	18,2	19,0	19,8	20,6	21,3	22,0	(±)0,3
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	24,9	25,1	25,2	25,3	25,4	25,6	25,7	25,8	(±)0,3
11	Длина воротника по отлёту, см	все роста	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	(±)0,5

Продолжение Таблицы В26.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	83,8	84,0	84,2	84,5	84,8	85,0	85,3	85,5	(±)1,0
		164-170	89,8	90,0	90,2	90,5	90,8	91,0	91,3	91,5	
		176-182	92,8	93,0	93,2	93,5	93,8	94,0	94,3	94,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,5	44,4	45,3	46,2	47,1	48,0	48,9	49,8	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	90,4	91,3	92,2	93,1	94,0	94,8	95,7	96,6	(±)1,0
		164-170	96,4	97,3	98,2	99,1	100,0	100,8	101,7	102,6	
		176-182	99,4	100,3	101,2	102,1	103,0	103,8	104,7	105,6	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,2	62,4	64,6	66,8	69,0	71,3	73,5	75,8	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	70,7	72,9	75,1	77,3	79,5	81,8	84,0	86,3	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	58,3	58,4	58,5	58,6	58,7	58,8	58,9	59,0	(±)1
		164-170	62,3	62,4	62,5	62,6	62,7	62,8	62,9	63,0	
		176-182	64,3	64,4	64,5	64,6	64,7	64,8	64,9	65,0	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,8	23,5	24,2	24,9	25,5	26,1	26,7	27,3	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,2	15,5	15,8	16,0	16,2	16,4	16,6	16,9	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по нижнему краю, см	все роста	22,7	23,4	24,1	24,8	25,5	26,2	26,9	27,6	(±)0,3
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	25,9	26,0	26,1	26,1	26,2	26,3	26,4	26,4	(±)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 127 из 529

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
11	Длина воротника по отлёту, см	все роста	44,0	45,0	46,0	47,00	48,00	49,0	50,0	51,0	(+/-)0,5

В27. Халат медицинский женский модель 130-1.

Описание модели

Халат медицинский женский длиной до колен, полуприлегающего силуэта, слегка расширенный к низу (расширение равно 3 см).

Перед с отрезными кокетками выше линии груди; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа, с одним верхним накладным карманом закругленной формы, линия входа которого оформлена притачной планкой шириной 1,9-2,1 см; с двумя нижними накладными карманами закругленной формы. Изделие с центральной бортовой застежкой до верха на 9 кнопок. Край борта левой полочки должен быть обработан подборт, край правой полочки закругленный внизу и должен быть обработан притачной планкой шириной 3,7-3,9 см, переходящей на низ. Низ левой полочки прямой и должен быть обработан притачной планкой шириной 3,7-3,9 см.

Спинка с отрезной кокеткой выше уровня лопаток и средним швом. Низ спинки слегка закругленный и должен быть обработан притачной планкой шириной 3,7-3,9 см.

Рукава втачные одношовные, длиной 3/4. Низ рукавов должен быть обработан широкой подгибкой.

Воротник стояче-отложной, на отрезной стойке. Отложная часть воротника неполная: плавно уходит в стойку за плечевыми швами и посередине спинки отсутствует.

Стойка воротника, планка верхнего кармана, планка борта правой полочки, планка низа левой полочки и спинки могут быть выполнены из отделочной ткани с принтом (по желанию заказчика).

По кокеткам, рельефам, краям бортов, воротника, стойки, низу изделия, швам притачивания всех планок и швам настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 3,2-3,4 см от края.

По линиям входов нижних карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,8-3,0 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 0,9-1,1 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом основной и отделочной тканей.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2



Рисунок В27– Халат медицинский женский модель 130-1

Таблица В27.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 130-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Правая полочка	1	0
2	Бочок правой полочки	1	0
3	Кокетка правой полочки	1	0
4	Левая полочка	1	0
5	Бочок левой полочки	1	0
6	Кокетка левой полочки	1	0
7	Спинка	2	1
8	Кокетка спинки	1	0
9	Рукав	2	1
10	Верхний карман	1	0
11	Нижний карман	2	1
12	Воротник	4	2
13	Подборт левой полочки	1	0
	Отделочная ткань		
14	Планка верхнего кармана	1	0
15	Стойка воротника	2	1
16	Планка правой полочки	2	1
17	Планка левой полочки	2	1
18	Планка спинки	2	1
	Прокладочный материал		

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-
2023, ред.2

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
19	Стойка	1	0
	Итого:	29	9

Таблица В27.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 130-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	97,0	97,5	98,0	98,5	99,0	99,5	99,9	100,3	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	36,0	37,1	38,2	39,2	40,0	40,7	41,5	42,3	(+/-0,5)
3	Длина левой полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	98,2	99,0	99,8	100,6	101,4	102,3	103,3	104,3	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	47,2	49,3	51,4	53,6	55,7	57,8	59,9	62,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	58,2	60,3	62,4	64,6	66,7	68,9	71,0	73,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	44,3	44,5	44,7	44,9	45,2	45,5	45,8	46,1	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	17,2	17,8	18,4	19,0	19,6	20,2	20,8	21,5	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	14,1	14,5	14,9	15,3	15,7	16,2	16,8	17,4	(+/-0,5)
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	164-170	9,5	9,7	9,7	10,2	10,2	10,5	10,5	10,9	(+/-0,3)
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	164-170	10,0	10,1	10,1	10,3	10,3	10,4	10,4	10,6	(+/-0,3)
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	15,8	16,7	16,7	18,2	18,2	19,6	19,6	21,5	(+/-0,3)
12	Глубина нижнего кармана посередине, см	164-170	21,3	21,3	21,3	21,8	21,8	22,6	22,6	23,3	(+/-0,3)

Продолжение Таблицы В27.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	100,8	101,3	101,8	102,3	102,8	103,3	103,8	104,3	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	43,1	43,8	44,6	45,4	46,2	47,0	47,8	48,6	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	105,3	106,3	107,4	108,4	109,4	110,5	111,5	112,5	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	73,0	77,0	79,0	81,0	83,0	85,0	87,0	89,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	46,3	46,5	46,8	47,1	47,4	47,6	47,8	48,0	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	22,1	22,8	23,5	24,2	24,8	25,5	26,2	26,8	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	18,1	18,9	19,4	19,9	20,5	21,0	21,5	22,0	(+/-0,5)
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	164-170	10,9	11,3	11,3	11,3	11,5	11,5	11,7	11,7	(+/-0,3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 130 из 529

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	164-170	10,6	11,1	11,1	11,1	11,3	11,3	11,54	11,5	(+/-0,3)
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	21,5	20,7	20,7	20,7	21,5	21,5	22,0	22,0	(+/-0,3)
12	Глубина нижнего кармана посередине, см	164-170	23,3	23,3	23,3	23,3	23,8	23,8	23,8	23,8	(+/-0,3)

B28. Халат медицинский женский модель 131-1.

Описание модели

Халат медицинский женский из белой или гладкокрашеной ткани длиной выше колен, полуприлегающего силуэта, со смещенными вперед на 4,5 см плечевыми швами.

Перед с центральной бортовой застежкой на 6 обметанных петель и 6 пуговиц; с фигурным вырезом горловины; с рельефными швами, выходящими из горловины и доходящими до низа изделия; с двумя нижними накладными карманами, передние срезы которых входят в рельефы, а задние - в боковые швы. Верхние края карманов должны быть оформлены подгибкой шириной 3,0 см, застроченной на лицевую сторону.

Спинка с рельефными швами, выходящими из горловины и доходящими до низа изделия.

Рукава втачные, одношовные, длинные. Низ рукавов должен быть оформлен подгибкой шириной 3,0 см, застроченной на лицевую сторону.

Воротник-стойка шириной 2,5-3,7 см.

По краю воротника, бортов и шву втачивания воротника в горловину должны быть проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться пластмассовые пуговицы диаметром 1,8 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

Рост: 164-170

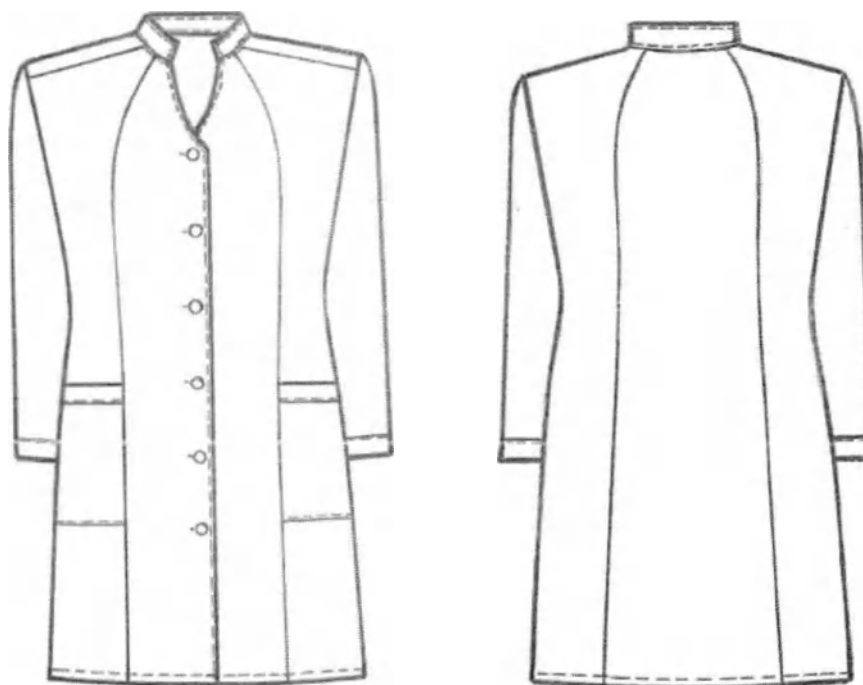


Рисунок В28– Халат медицинский женский модель 131-1

Таблица В28.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 131-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	1	0
4	Бочок спинки	2	1
5	Рукав	2	1
6	Карман	2	1
7	Воротник	2	1
8	Подборт	2	1
	ИТОГО	15	7

Таблица В28.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 131-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	85.3	85.8	86.4	87.1	87.3	87.6	87.9	88.1	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	34.6	35.8	36.8	37.8	38.8	39.8	40.7	41.6	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	87.2	87.8	88.7	89.6	90.5	91.1	91.8	92.6	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	44.4	46.5	48.6	50.7	52.8	54.9	57.0	59.1	(+/-1)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

5	Ширина изделия внизу, см	164-170	51,7	53,8	55,9	58,0	60,1	62,2	64,3	66,4	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	57,8	58,0	58,2	58,4	58,6	58,8	59,0	59,3	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	16,9	17,4	17,9	18,4	18,9	19,5	20,2	21,1	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	12,0	12,3	12,6	13,0	13,3	13,6	14,0	14,3	(+/-0,5)
9	Ширина кармана по линии входа, см	164-170	12,8	13,7	14,3	15,0	15,8	16,5	17,2	18,1	(+/-0,3)
10	Глубина кармана, см	164-170	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	(+/-0,3)
11	Длина воротника по отлету, см	164-170	32,2	33,0	33,7	34,4	35,2	35,8	36,4	37,2	(+/-0,5)

В29. Халат медицинский женский модель 132-1.

Описание модели

Халат медицинский женский длиной до колен спереди, сзади длиннее на 9,0 см, с плавным переходом длины (низ изделия должен быть обработан обтачкой); трапецевидного силуэта; с декоративной патой – погоном, шириной 2,8-3,0 см на левом плечевом шве, вшитой одним концом в пройму и закрепленной с помощью шлевки шириной 1,3 см.

Перед с косыми нагрудными вытачками; с центральной бортовой комбинированной застежкой до верха: вверху – на 4 обметанных петли и 4 пуговицы, ниже линии груди – супатная, на 5 обметанных петель и 5 пуговиц; с притачными планками под застежку шириной 3,0-3,2 см; с двумя верхними накладными карманами квадратной формы, по центру которых заутюжены бантовые складки шириной 2,1-2,2 см; с двумя косыми прорезными боковыми карманами с листочками шириной 2,0-2,2 см; с горизонтальным подрезом чуть ниже линии бедер, оформленным складкой-подворотом шириной 3,9-4,1 см. На нижней отрезной части переда должны быть заложены по 6 вертикальных мягких складок на каждой полочке. В шов настрачивания левого верхнего кармана спереди должна быть вшита декоративная полоска шириной 0,9-1,1 см из отделочной ткани.

Спинка с отрезной кокеткой, в шве притачивания которой должна быть заложена складка – подворот шириной 3,6-3,8 см.

Рукава втачные, одношовные, длиной выше локтя. Низ рукавов должен быть обработан подгибкой шириной 2,9-3,1 см, застроченной на лицевую сторону. На правом рукаве над подгибкой должна быть настрочена декоративная деталь размером 4,0х8,0 см из отделочной ткани.

Воротник стояче-отложной, на отрезной стойке, застегивающейся на одну обметанную петлю и одну пуговицу. Стойка воротника должна быть выполнена из отделочной ткани.

По краям планок застежки и стойки воротника, по швам настрачивания верхних карманов, шлевки, декоративной детали рукава, а также по контурам нижних карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

По краям воротника и погона должна быть проложена строчка на расстоянии 0,6-0,7 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 4,4-4,6 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться пластиковые пуговицы диаметром 1,3-1,5 см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

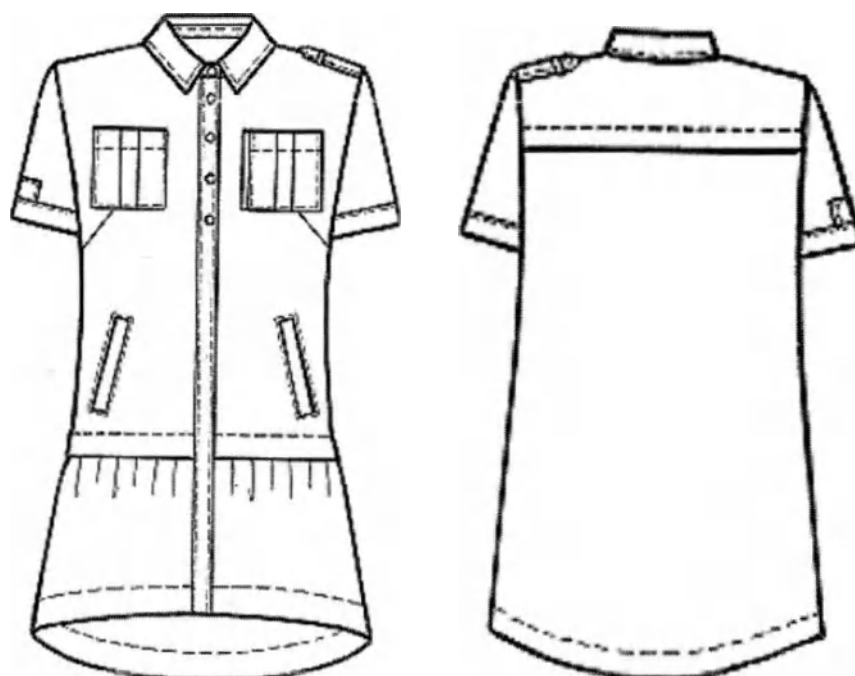


Рисунок В29– Халат медицинский женский модель 132-1

Таблица В29.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 132-

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Нижняя часть полочки	2	1
3	Спинка	1	0
4	Кокетка спинки	1	0
5	Рукав	2	1
6	Верхний карман	2	1
7	Обтачка верхнего кармана	2	1
8	Листочка	2	1
9	Верхняя мешковина кармана	2	1
10	Нижняя мешковина кармана	2	1
11	Воротник	2	1

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 134 из 529

12	Планка застежки	2	1
13	Погон	2	1
14	Обтачка низа полочки	2	1
15	Обтачка низа спинки	1	0
16	Планка супатной застежки	1	0
	Отделочная ткань		
17	Стойка воротника	2	1
18	Отделка рукава	1	0
19	Отделка кармана	1	0
	Итого:	32	13

Таблица В29.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 132-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	93,4	94,3	94,5	94,8	95,1	95,9	96,0	96,4	(±)1,0
		164-170	99,4	100,3	100,5	100,8	101,1	101,9	102,0	102,4	
		176-182	102,4	103,3	103,5	103,8	104,1	104,9	105,0	105,4	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	34,8	36,0	37,0	38,0	39,2	40,2	41,0	41,9	(±)1,0
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	85,6	86,2	87,0	87,6	88,4	88,7	89,3	90,1	(±)1,0
		164-170	91,6	92,2	93,0	93,6	94,4	94,7	95,3	96,1	
		176-182	94,6	95,2	96,0	96,6	97,4	97,7	98,3	99,1	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	84,0	86,0	88,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	20,6	20,8	21,0	21,2	21,4	21,8	22,0	22,4	(±)0,5
		164-170	22,6	22,8	23,0	23,2	23,4	23,8	24,0	24,4	
		176-182	23,6	23,8	24,0	24,2	24,4	24,8	25,0	25,4	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	15,2	16,1	16,8	17,4	18,0	18,5	19,2	20,2	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,0	15,5	16,0	16,5	17,1	17,6	18,2	18,9	(±)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	11,0	11,0	11,4	11,4	11,8	11,8	12,0	12,0	(±)0,3
10	Глубина верхнего кармана, см	все роста	12,5	12,5	13,0	13,0	13,2	13,2	13,4	13,4	(±)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	14,7	14,7	14,7	14,7	15,0	15,0	15,5	15,5	(±)0,3
12	Длина воротника по отлету, см	все роста	45,3	46,3	47,3	48,3	49,3	50,3	51,3	52,3	(±)0,5

Продолжение Таблицы В29.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	96,7	96,9	97,2	97,5	97,7	97,9	98,2	98,5	(±)1,0
		164-170	102,7	102,9	103,2	103,5	103,7	103,9	104,2	104,5	
		176-182	105,7	105,9	106,2	106,5	106,7	106,9	107,2	107,5	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
2	Ширина спинки в самом узком месте. см	все роста	42.7	43.4	44.1	44.7	45.3	46.0	46.6	47.4	(+/-)1,0
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа. см	152-158	91.0	91.7	92.4	93.1	93.9	94.7	95.4	96.2	(±)1,0
		164-170	97.0	97.7	98.4	99.1	99.9	100.7	101.4	102.2	
		176-182	100.0	100.7	101.4	102.1	102.9	103.7	104.4	105.2	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы. см	все роста	63.5	65.5	67.5	69.5	71.5	73.5	75.5	77.5	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки). см	все роста	90.0	92.0	94.0	96.0	98.0	100.0	102.0	104.0	(+/-)1,0
6	Длина рукава. см	152-158	22.6	22.8	23.0	23.2	23.4	23.6	23.8	24.0	(±)0,5
		164-170	24.6	24.8	25.0	25.2	25.4	25.6	25.8	26.0	
		176-182	25.6	25.8	26.0	26.2	26.4	26.6	26.8	27.0	
7	Ширина рукава под проймой. см	все роста	21.2	22.0	23.0	24.0	24.9	25.9	26.9	27.8	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу. см	все роста	19.8	20.6	21.4	22.2	23.0	23.8	24.6	25.4	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана. см	все роста	12.5	12.5	12.7	12.7	12.7	13.0	13.0	13.0	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана. см	все роста	13.5	13.5	13.7	13.7	13.7	14.0	14.0	14.0	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа. см	все роста	16.0	16.0	16.0	16.5	16.5	16.5	17.0	17.0	(+/-)0,3
12	Длина воротника по отлету. см	все роста	53.3	54.3	55.3	56.3	57.3	58.3	59.3	60.3	(+/-)0,5

В30. Халат медицинский женский модель 134-1.

Описание модели

Халат медицинский женский из белой или гладкокрашеной ткани длиной до колен, полуприлегающего силуэта, слегка расширенный к низу (расширение равно 4,0 см); без воротника, с овальным вырезом горловины, обработанным обтачкой; с разрезами в боковых швах.

Перед с центральной бортовой застежкой на 9 обметанных петель и 9 пуговиц; с отрезными кокетками; с декоративными листочками шириной 1,2-1,4 см в швах притачивания кокеток; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа; с двумя боковыми накладными карманами, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы. В передних верхних углах карманов должны быть установлены закрепки на спецмашине. Борты должны быть обработаны притачными планками шириной 3,5-4,0 см (в зависимости от размера).

Спинка с закругленными рельефными швами, выходящими из верхней части пройм и доходящими до низа; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скрепленными посередине спинки с помощью пуговицы.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Рукава втачные одношовные, короткие. Низ рукавов должен быть оформлен притачными отложными манжетами шириной 3,5-3,7 см.

Листочки и правый полупояс выполнены из отделочной ткани контрастного цвета.

По рельефам, кокеткам, краям поясов, разрезов, планок и швам настрачивания карманов должны быть проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По горловине должна быть проложена строчка на расстоянии 3,8-4,0 см от края.

По верху карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 3,3-3,5 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В углах разрезов на боковых швах должны быть установлены закрепки на спецмашине.

В качестве фурнитуры должны использоваться пластмассовые пуговицы диаметром 1,7-1,9 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом основной ткани. Для выполнения закрепок и пришивания пуговиц-нитки в тональном сочетании с цветом отделочной ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.

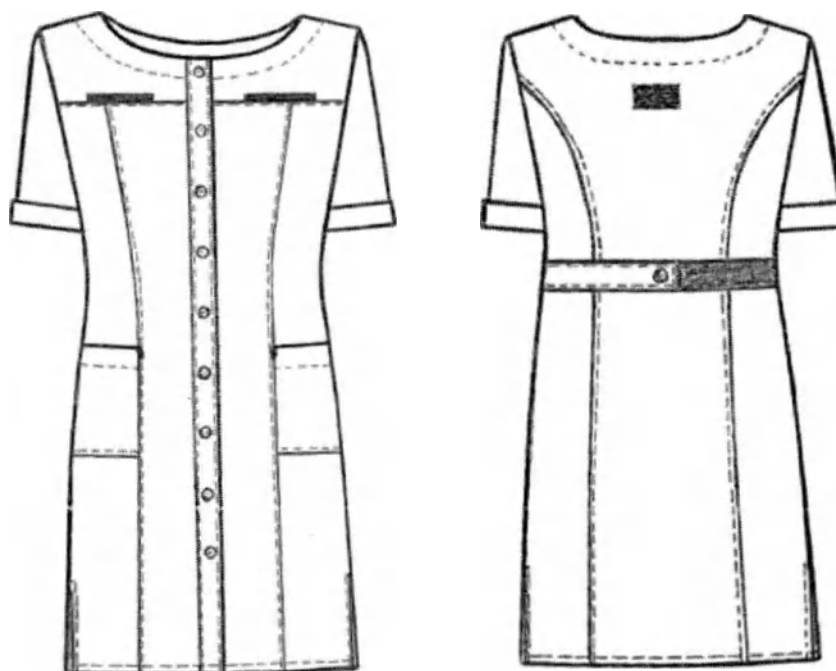


Рисунок В30 – Халат медицинский женский модель 134-1

Таблица В30.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 134-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
---	---------------------------	--------------------	---------------------

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023. ред.2

	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Кокетка полочки	2	1
4	Спинка	1	0
5	Бочок спинки	2	1
6	Планка застежки	2	1
7	Рукав	2	1
8	Манжета	2	1
9	Карман	2	1
10	Полупояс левый	1	0
11	Обтачка горловины полочки	2	1
12	Обтачка горловины спинки	1	0
	Отделочная ткань		
13	Листочка	2	1
14	Полупояс правый	1	0
15	Отделочная деталь на спинку	1	0
	Итого:	25	10

Таблица В30.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 134-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	97,4	97,5	97,7	97,9	98,2	98,3	98,5	98,7	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	35,2	36,0	36,7	37,5	38,3	39,1	39,8	40,5	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	99,3	99,9	100,5	101,1	101,7	102,3	102,9	103,5	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	55,0	57,0	59,0	61,0	63,1	65,2	67,3	69,4	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	20,0	20,2	20,5	20,8	21,1	21,4	21,7	22,0	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	17,0	17,6	18,3	19,0	19,6	20,3	21,0	21,7	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	16,2	16,8	17,4	18,0	18,7	19,4	20,0	20,7	(+/-0,5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	13,8	14,4	15,3	16,2	16,9	17,7	18,5	19,5	(+/-0,3)
10	Глубина нижнего кармана, см	164-170	19,6	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	20,2	20,2	(+/-0,3)

Продолжение Таблицы В30.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	98,8	99,0	101,4	101,5	101,7	103,5	103,7	104,1	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	41,2	42,0	42,8	43,6	44,5	45,3	46,0	46,7	(+/-0,5)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	104.1	104.7	107.3	107.9	108.5	111.3	112.1	112.9	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	71.5	73.5	75.8	77.9	80.0	82.3	84.4	86.5	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	22.4	22.8	23.2	23.7	24.2	24.6	24.9	25.2	(+/-0.5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	22.5	23.5	24.6	25.7	26.5	27.2	27.9	28.6	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	21.5	22.5	23.6	24.7	25.7	26.4	27.0	27.5	(+/-0.5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	20.3	21.1	22.0	23.0	24.0	23.1	23.2	23.4	(+/-0.3)
10	Глубина нижнего кармана, см	164-170	20.2	20.2	20.7	20.7	20.7	20.7	20.8	20.8	(+/-0.3)

В31. Халат медицинский женский модель 135-1.

Описание модели

Халат медицинский женский из белой или гладкокрашеной ткани длиной до колен, полуприлегающего силуэта, отрезной по линии талии.

Перед с центральной бортовой застежкой до верха на 8 обметанных петель и 8 пуговиц с притачными кокетками; с отделочной вставкой шириной 5,5-5,7 см, расположенной на 6,1-6,3 см от низа изделия; с двумя рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до швов притачивания вставок; с двумя вертикальными нагрудными вытачками, выходящими из шва на линии талии и двумя мягкими складками, выходящими из шва на линии талии под нагрудными вытачками. Борта полочек должны быть обработаны притачными планками шириной 3,5-3,7 см. На левой полочке под кокеткой должен быть обработан накладной карман закругленной формы. В рельефных швах ниже линии талии должны быть обработаны 2 кармана. На закруглениях верхнего кармана и по краям входов в нижние карманы должны быть установленные на спецмашине закрепки.

Спинка с притачной кокеткой, отделочной вставкой из ткани или сеткой шириной 5,5-5,7 см, расположенной на 6,1-6,3 см от низа изделия и двумя рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до шва притачивания вставки.

Рукава втачные одношовные, длиной 3/4, с отделочной вставкой или сеткой шириной 5,5-5,7 см, расположенной на 3,5-3,7 см от низа.

Воротник стояче-отложной, на отрезной стойке, застегивающийся на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу. Стойка воротника должна быть выполнена из отделочной ткани контрастного цвета.

По кокетке, рельефам, краям воротника и планок застежки, швам притачивания стойки к воротнику, швам втачивания воротника и притачивания вставок, а также шву

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

настрачивания верхнего кармана должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По линии входа верхнего кармана должна быть проложена строчка на расстоянии 2,0 см от края.

По низу изделия и низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться пластмассовые пуговицы диаметром 1,6-1,8 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом основной и отделочной тканей.

Для выполнения закрепок должны использоваться нитки контрастного цвета (в тональном сочетании с цветом отделочной ткани).

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;

Рост: 164-170.



Рисунок В31– Халат медицинский женский модель 135-1

Таблица В31.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 135-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет. кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Нижняя часть полочки	2	1
4	Нижняя часть бочка полочки	2	1
5	Кокетка полочки	2	1
6	Спинка	1	0
7	Бочок спинки	2	1
8	Нижняя часть спинки	1	0
9	Нижняя часть бочка спинки	2	1
10	Кокетка спинки	1	0
11	Планка застежки	2	1
12	Рукав	2	1
13	Верхний карман	1	0
14	Мешковина нижнего кармана	4	2
15	Нижняя полоса полочки	2	1
16	Нижняя полоса спинки	1	0
17	Нижняя полоса рукава	2	1
18	Воротник	2	1
	Отделочная ткань №1		
19	Вставка полочки	2	1
20	Вставка спинки	1	0
21	Вставка рукава	2	1
	Отделочная ткань №2 (гладкокрашеная)		
22	Стойка воротника	2	1
	ИТОГО	40	17

Таблица В31.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 135-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер						Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	97,7	98,2	98,7	99,2	99,7	100,1	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	35,8	36,8	37,6	38,6	39,6	40,5	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	100,8	101,7	102,6	103,4	104,2	104,9	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	43,3	43,5	43,7	44,0	44,2	44,3	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	17,9	18,6	19,3	19,9	20,5	21,1	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	15,0	15,6	16,2	16,7	17,3	17,8	(+/-0,5)
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	164-170	9,1	9,1	9,6	9,6	10,2	10,2	(+/-0,3)
10	Глубина верхнего кармана, см	164-170	9,4	9,4	9,7	9,7	9,8	9,8	(+/-0,3)
11	Длина входа нижнего кармана, см	164-170	14,5	14,8	14,8	15,4	15,4	15,4	(+/-0,3)
12	Длина воротника по отлету, см	164-170	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	(+/-0,5)

Продолжение Таблицы В31.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер
---	------------------------	------	--------

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

			52	54	56	58	60	Допуск, см
1	Длина спинки посередине, см	164-170	100,6	101,0	101,4	101,8	102,2	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	41,4	42,2	43,0	43,8	44,6	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	105,8	106,5	107,6	108,6	109,6	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	57,5	59,5	61,6	63,7	65,8	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	44,5	44,7	45,0	45,2	45,4	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	21,8	22,5	23,3	24,2	25,0	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	18,3	18,8	19,3	19,8	20,4	(+/-0,5)
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	164-170	10,7	10,7	11,4	11,4	11,4	(+/-0,3)
10	Глубина верхнего кармана, см	164-170	10,2	10,2	10,7	10,7	10,7	(+/-0,3)
11	Длина входа нижнего кармана, см	164-170	15,8	15,8	15,8	16,4	16,4	(+/-0,3)
12	Длина воротника по отлету, см	164-170	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	(+/-0,5)

В32. Халат медицинский женский модель 136-1.

Описание модели

Халат медицинский женский полуприлегающего силуэта из белой или гладкокрашеной ткани; длиной выше линии колена; без воротника, с овальным вырезом горловины, обработанным обтачкой.

Перед отрезной по линии талии; с косым подрезом, выходящим из левого плеча и доходящим до низа; с горизонтальной вставкой шириной 3,8-4,0 см, выходящей из левого бокового шва и заканчивающейся в косом подрезе; с двумя рельефными швами, выходящими из пройм. Левый рельеф заканчивается в шве притачивания горизонтальной вставки, правый в горизонтальном шве на линии талии. На нижней части переда должны быть обработаны карманы в швах дугообразных подрезов, выходящих из шва по линии талии и заканчивающихся в боковых швах. В косом подрезе внизу должна быть обработана шлица. Правая нижняя часть переда со скошенным низом, удлиненным в области шлицы на 3,0-4,0 см (в зависимости от размера) относительно левой.

На косом подрезе выше линии груди и в начале шлицы должны быть установлены на спецмашине по 2 горизонтальные декоративные закрепки с расстоянием 0,5-0,7 см между ними.

Спинка со средним швом, в котором обработана застежка на потайную тесьму-«молнию», с двумя рельефными швами, выходящими из пройм и доходящими до низа.

Рукава втачные, одношовные, короткие.

По горловине, рельефам, подрезам, входам в карманы должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

По низу рукавов и низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 2,8-3,0 см от края. По низу левого рукава по центру может быть закреплен металлический логотип с фирменной символикой (по желанию заказчика).

В качестве фурнитуры используется потайная тесьма-«молния» длиной 60 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Для выполнения декоративных закрепок должны использоваться нитки контрастного цвета.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

Рост: 164-170.

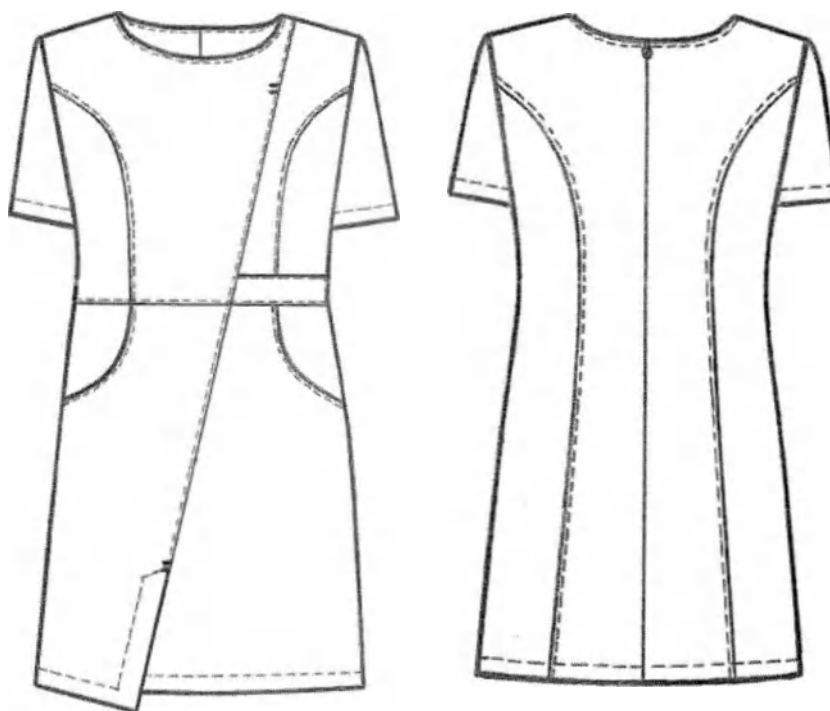


Рисунок В32—Платье медицинское женское модель 136-1

1
Таблица В32.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 136-

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет. кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Верхняя центральная часть переда	1	0
2	Верхняя левая часть переда	1	0
3	Правый бочок переда	1	0
4	Левый бочок переда	1	0
5	Вставка переда	1	0
6	Нижняя правая часть переда	1	0

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

7	Нижняя левая часть переда	1	0
8	Спинка	2	1
9	Бочок спинки	2	1
10	Мешковина кармана с бочком	2	1
11	Мешковина кармана	2	1
12	Рукав	2	1
13	Обтачка горловины переда	1	0
14	Обтачка горловины спинки	2	1
	Прокладочный материал (клеевая)		
15	Обтачка горловины переда	1	0
16	Обтачка горловины спинки	2	1
17	Клеевая на шлицу	1	0
	ИТОГО	24	7

Таблица В32.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 136-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер						Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	87,6	88,0	88,2	88,3	88,4	88,5	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	34,5	35,3	36,0	37,0	37,8	38,5	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	90,0	91,0	91,8	92,4	93,0	93,5	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	21,0	21,2	21,4	21,5	21,9	22,4	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	15,4	16,1	16,8	17,4	18,1	18,9	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	14,9	15,5	16,3	16,9	17,5	18,0	(+/-0,5)

Продолжение Таблицы В32.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер						Допуск, см
			52	54	56	58	60	62	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	88,6	88,7	88,8	89,6	90,5	91,0	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	39,3	40,0	40,7	41,4	42,1	42,8	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	94,0	94,5	95,1	96,2	97,3	98,3	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	57,1	59,2	61,3	63,4	65,5	67,6	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	22,8	23,2	23,6	23,8	24,0	24,3	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	19,8	20,8	21,8	22,6	23,5	24,2	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	18,9	19,8	21,0	21,9	22,8	23,4	(+/-0,5)

В33. Халат медицинский женский модель 137-1.

Описание модели

Халат медицинский женский из белой или гладкокрашеной ткани длиной до колен, полуприлегающего силуэта; со смещенными вперед на 3,0 см плечевыми швами; без воротника, с зауженной V-образной горловиной, обработанной сзади притачной планкой

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

шириной 3,9-4,1 см, а спереди-подбортами; с разрезами длиной 3,9-4,1 см в плечевых швах (до шва притачивания планки).

Перед с центральной бортовой застежкой на 7 обметанных петель и 7 пуговиц или на 7 кнопок; с рельефными швами, выходящими из пройм и доходящими до низа; с двумя нижними накладными карманами с наклонными входами, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы. Из передних срезов карманов выходят косые подрезы, заканчивающиеся сверху треугольными вырезами.

Спинка со средним швом, заканчивающимся шлицей, с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне талии и скрепленными посередине спинки с помощью двух полуколец, продетых в простроченную подгибку левого полупояса.

Рукава втачные, одношовные, длиной 3/4. Низ рукавов должен быть оформлен подгибкой шириной 4,0 см, застроченной на лицевую сторону.

По краям бортов, горловины, карманов, полупоясов, по рельефам, плечевым швам шву втачивания планки в горловину, подрезам карманов и швам их настрачивания должна быть проложена строчка на расстоянии 1,0-0,2 см от края или шва.

По низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 3,8-4,0 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от подогнутого края.

В качестве фурнитуры должны использоваться пластмассовые пуговицы диаметром 1,7-1,9 см или металлические кнопки диаметром 1,1-1,2 см и металлические полукольца шириной 3,0-3,5 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.

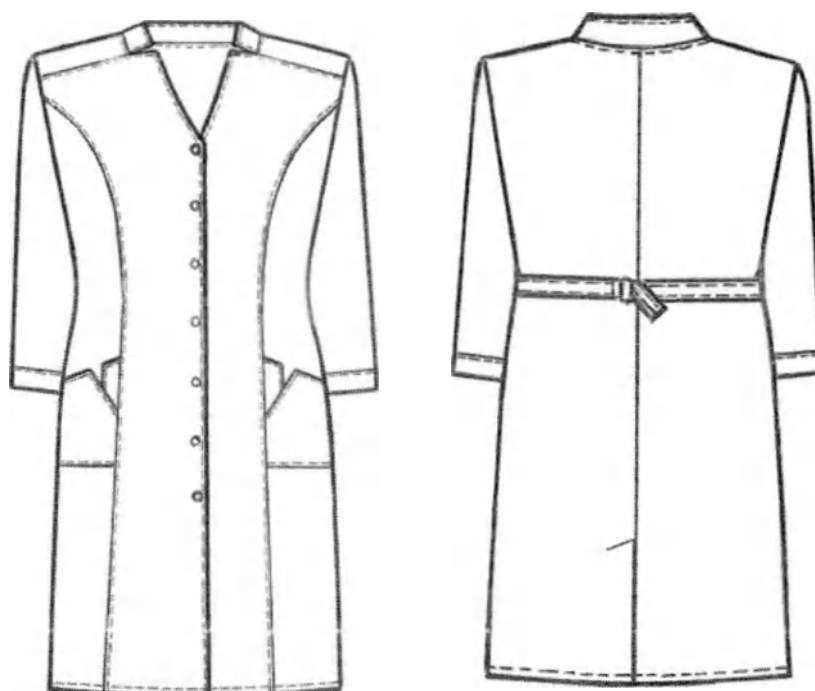


Рисунок В33– Халат медицинский женский модель 137-1

Таблица В33.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 137-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	2	1
4	Рукав	2	1
5	Карман	2	1
6	Вставка кармана	4	2
7	Планка горловины спинки	2	1
8	Правый полупояс	1	0
9	Левый полупояс	1	0
10	Подборт	2	1
11	Обтачка кармана	2	1
12	Обтачка горловины спинки	1	0
	Итого	23	10

Таблица В33.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 137-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине (без планки), см	164-170	92,5	92,8	93,2	93,6	94,1	94,6	95,2	96,0	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	36,2	37,0	37,9	38,8	39,7	40,6	41,4	42,2	(+/-0,5)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 146 из 529

3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа. см	164-170	97.7	98.3	99.0	99.6	100.3	101.0	102.0	103.2	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы. см	164-170	46.5	48.5	50.5	52.6	54.7	56.8	58.9	61.0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу. см	164-170	56.5	58.5	60.6	62.8	65.0	67.1	69.1	71.1	(+/-1)
6	Длина рукава. см	164-170	45.5	45.8	46.1	46.4	46.8	47.1	47.3	47.5	(+/-0.5)
7	Ширина рукава под проймой. см	164-170	17.3	17.9	18.6	19.3	19.9	20.5	21.1	21.7	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу. см	164-170	13.9	14.4	14.9	15.4	15.8	16.2	16.6	17.1	(+/-0.5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа. см	164-170	14.1	14.8	15.6	16.3	17.0	17.8	18.6	19.4	(+/-0.3)
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю. см	164-170	19.5	19.6	19.8	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	(+/-0.3)

Продолжение Таблицы В33.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см.
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине (без планки). см	164-170	96.8	97.5	98.3	99.0	99.5	100.0	100.5	101.0	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте. см	164-170	43.0	43.7	44.4	45.2	45.8	46.4	47.0	47.5	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа. см	164-170	104.2	105.2	106.3	107.4	108.4	109.4	110.5	111.6	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы. см	164-170	63.1	65.2	67.3	69.4	71.5	73.5	75.5	77.5	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу. см	164-170	73.1	75.1	77.3	79.5	81.7	83.9	86.1	88.3	(+/-1)
6	Длина рукава. см	164-170	47.7	47.9	48.1	48.4	48.6	48.9	49.2	49.5	(+/-0.5)
7	Ширина рукава под проймой. см	164-170	22.3	23.0	23.7	24.3	24.9	25.6	26.3	27.0	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу. см	164-170	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.4	20.8	(+/-0.5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа. см	164-170	20.2	21.1	22.0	23.0	22.5	23.0	23.0	23.3	(+/-0.3)
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю. см	164-170	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0	21.1	21.2	(+/-0.3)

В34. Халат медицинский женский модель 138-1.

Описание модели

Халат медицинский женский из белой или гладкокрашеной ткани, длиной выше колен; прямого силуэта, умеренного объема; с притачной кокеткой. По спинке шов притачивания кокетки проходит выше уровня лопаток, на передё ширина кокетки 1,0-1,5 см у горловины и 4,5-5,0 см у пройм.

Перед с центральной застежкой на тесьму-«молнию», заходящую вверх на воротник; с двумя косыми нагрудными вытачками, выходящими из горловины; с двумя нижними боковыми карманами с косыми входами. Верхние края карманов на уровне талии, задние срезы входят в боковые швы; входы в карманы обработаны обтачками. Над карманами на уровне линии талии должны быть настроены кулиски шириной 3,0-3,2 см, выходящие из

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

боковых швов и доходящие до передних краев карманов. В кулиске продернута тесьма или поясok или шириной 2,4-2,6 см выполненный из отделочной ткани, вшитая в боковые швы.

Спинка с кулиской шириной 3,0-3,2 см, настроенной по линии талии, в которую продета эластичная тесьма; с двумя накладными карманами фигурной формы, настроенными ниже линии талии. В передних углах карманов должны быть установленные на спецмашине закрепки. В шов притачивания кокетки посередине спинки должен быть вшит отрезок тесьмы или ткани контрастного цвета в виде петли длиной 1,1-1,3 см.

Рукава втачные, одношовные, короткие.

Воротник-стойка шириной 3,4-3,6 см. Нижний воротник должен быть выполнен из отделочной ткани контрастного цвета.

По краям воротника, швам притачивания кокетки, настрачивания кулисок и карманов, а также швам втачивания молнии должны быть проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По верхним краям карманов и по низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,8-3,0 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должна использоваться разъемная тесьма-«молния» в тональном сочетании с цветом отделочной ткани.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом основной ткани.

Для выполнения закрепок должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом отделочной ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;

Рост: 164-170

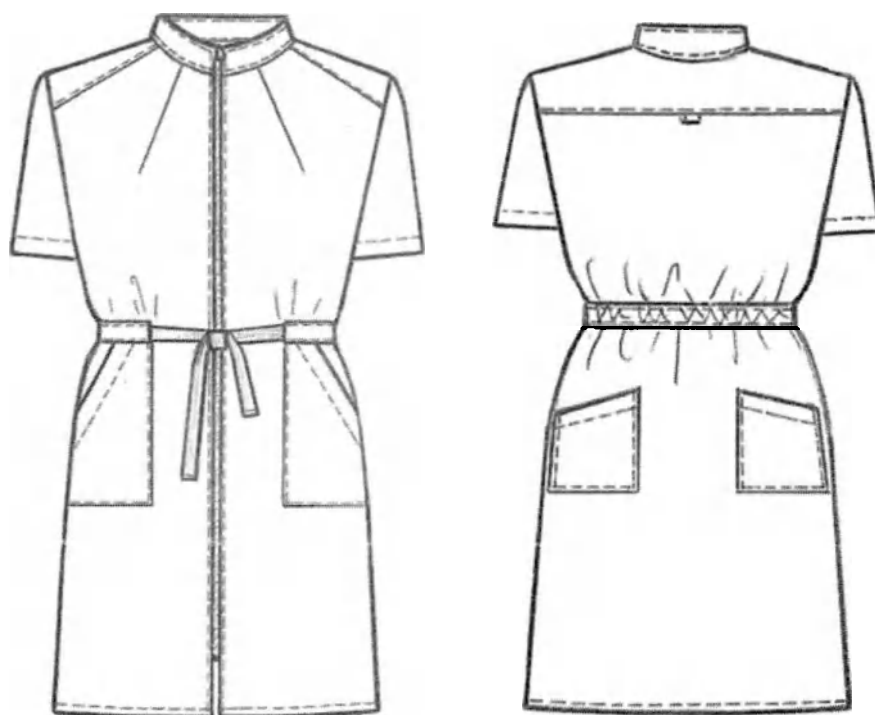


Рисунок В34– Халат медицинский женский модель 138-1

Таблица В34.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 138-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет. кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Спинка	1	0
3	Кокетка	1	0
4	Рукав	2	1
5	Передний карман	2	1
6	Задний карман	2	1
7	Воротник	1	0
8	Кулилка полочки	2	1
9	Кулилка спинки	1	0
10	Обтачка переднего кармана	2	1
11	Подборт	2	1
Отделочная ткань			
12	Воротник	1	0
	Итого	19	7

Таблица 34.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 138-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер						Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	90,8	91,4	91,8	92,2	92,6	93,0	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	93,6	94,2	95,1	96,0	96,6	97,2	(+/-1)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	19,5	19,7	19,8	19,9	20,1	20,3	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	16,6	17,1	17,7	18,2	18,7	19,4	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	16,1	16,6	17,1	17,7	18,2	18,8	(+/-0,5)
9	Ширина переднего кармана внизу, см	164-170	16,7	17,4	18,2	19,0	19,7	20,5	(+/-0,3)
10	Глубина переднего кармана по переднему краю, см	164-170	23,0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,4	(+/-0,3)
11	Ширина заднего кармана, см	164-170	14,7	15,2	15,5	15,8	16,1	16,5	(+/-0,3)
12	Глубина заднего кармана по переднему краю, см	164-170	16,0	16,0	16,3	16,3	16,3	16,3	(+/-0,3)
13	Длина воротника по отлету, см	164-170	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	(+/-0,5)

Продолжение Таблицы В34.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер					Допуск, см
			52	54	56	58	60	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	93,4	93,8	94,7	95,7	96,7	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	98,0	98,7	99,7	100,8	101,9	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	58,6	59,7	62,8	64,9	67,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	65,1	67,2	69,3	71,4	73,5	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	20,5	20,9	21,2	21,4	21,7	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	20,1	20,9	21,8	22,7	23,6	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	19,4	20,0	20,6	21,3	22,0	(+/-0,5)
9	Ширина переднего кармана внизу, см	164-170	21,4	22,2	22,6	23,0	23,4	(+/-0,3)
10	Глубина переднего кармана по переднему краю, см	164-170	23,5	23,5	23,7	23,8	23,9	(+/-0,3)
11	Ширина заднего кармана, см	164-170	16,9	17,3	17,5	17,7	18,0	(+/-0,3)
12	Глубина заднего кармана по переднему краю, см	164-170	16,3	16,5	16,5	16,5	16,5	(+/-0,3)
13	Длина воротника по отлету, см	164-170	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0	(+/-0,5)

В35. Халат медицинский женский модель 139-1.

Описание модели

Халат медицинский женский из белой или гладкокрашеной ткани, длиной выше колен полуприлегающего силуэта, с разрезами в боковых швах. В углах разрезов должны быть установленные на спецмашине закрепки.

Перед с центральной бортовой застежкой на 8 кнопок; с отрезными кокетками; с двумя вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа; с двумя нижними накладными карманами, боковые стороны которых входят в рельефные и боковые швы. В передних углах карманов должны быть установленные на спецмашине закрепки. На правом кармане должен быть обработан дополнительный карман с клапаном, пристегивающимся с помощью кнопки.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Спинка с отрезной кокеткой; с двумя вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с декоративным хлястиком шириной 3,4-3,6 см, состоящим из двух частей, вшитых одним концом в рельефные швы на уровне линии талии и скрепленных посередине спинки с помощью кнопки.

Рукава втачные, одношовные, короткие, 3/4 или длинные (по желанию заказчика). Низ рукавов должен быть оформлен подгибкой шириной 3,0 см, застроченной на лицевую (на длинных рукавах на изнаночную) сторону.

Воротник-стойка шириной 2,9-3,1 см.

По рельефам, краям бортов, воротника, хлястика, клапана кармана, по горловине переда, швам притачивания кокеток, настрачивания карманов и застрачивания подгибки низа рукавов должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см от края или шва.

По краям разрезов и шву втачивания воротника в горловину спинки должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По верхним краям карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,9-3,1 см от края.

По шву притачивания клапана к правому карману должна быть проложена строчка на расстоянии 0,6-0,7 см от шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться кнопки контрастного цвета.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани, для закрепок на карманах и разрезах должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом кнопок.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

Рост: 164-170.



Рисунок В35– Халат медицинский женский модель 139-1

Таблица В35.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 139-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	1	0
4	Бочок спинки	2	1
5	Кокетка полочки	2	1
6	Кокетка спинки	1	0
7	Рукав	2	1
8	Карман	2	1
9	Дополнительный карман	1	0
10	Клапан	1	0
11	Воротник	2	1
12	Хлястик	2	1
13	Подборт	2	1
	Итого	22	9

Таблица В35.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 139-1

№	Наименование измерения	Рост 164-170	Размер							Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	
1	Длина спинки посередине, см	С коротким рукавом	90,4	90,8	91,3	91,7	92,0	92,4	92,7	(±1)
		С рукавом 3/4	90,4	90,8	91,3	91,7	92,0	92,4	92,7	
		С длинным рукавом	87,4	87,8	88,3	88,7	89,0	89,4	89,7	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,4	(±0,5)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	С коротким рукавом С рукавом 3/4 С длинным рукавом	92.8 92.8 89.8	93.6 93.6 90.6	94.3 94.3 91.3	95.1 95.1 92.1	95.8 95.8 92.8	96.5 96.5 93.5	97.1 97.1 94.1	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все	44.5	46.5	48.5	50.5	52.5	54.5	56.5	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все	54.0	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0	66.0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	С коротким рукавом С рукавом 3/4 С длинным рукавом	22.9 44.5 57.3	23.0 44.7 57.5	23.1 44.8 57.7	23.2 45.0 57.9	23.4 45.1 58.0	23.6 45.3 58.1	23.9 45.5 58.3	(+/-0.5)
7	Ширина рукава под проймой, см	все	17.3	18.0	18.7	19.2	19.8	20.4	21.1	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	С коротким рукавом С рукавом 3/4 С длинным рукавом	16.7 14.4 12.2	17.2 14.8 12.5	17.6 15.1 12.7	18.2 15.5 13.0	18.8 18.8 13.2	19.2 16.1 13.5	19.7 16.6 13.7	(+/-0.5)
9	Ширина кармана по линии входа, см	все	13.5	14.2	15.0	15.7	16.4	17.2	18.0	(+/-0.3)
10	Глубина кармана, см	все	19.4	19.5	19.6	19.7	19.7	19.7	19.7	(+/-0.3)
11	Длина воротника по отлету, см	все	38.4	39.2	40.0	40.9	41.8	42.7	43.7	(+/-0.5)

Продолжение Таблицы В35.2

№	Наименование измерения	Рост 164-170	Размер						Допуск, см
			54	56	58	60	62	64	
1	Длина спинки посередине, см	С коротким рукавом С рукавом 3/4 С длинным рукавом	93.1 93.1 90.1	93.5 93.5 90.5	93.8 93.8 90.8	94.1 94.1 91.1	94.4 94.4 91.4	94.7 94.7 91.7	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все	42.3	43.1	43.8	44.6	45.4	46.2	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	С коротким рукавом С рукавом 3/4 С длинным рукавом	97.7 97.7 94.7	98.3 98.3 95.3	98.9 98.9 95.9	99.5 99.5 96.5	100.1 100.1 97.1	100.7 100.7 97.7	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все	58.5	60.5	62.5	64.5	66.5	68.5	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все	68.0	70.0	72.0	74.0	76.0	78.0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	С коротким рукавом С рукавом 3/4 С длинным рукавом	24.1 45.8 58.6	24.2 46.1 -	24.4 46.3 -	24.6 46.6 -	24.8 46.8 -	25.0 46.9 -	(+/-0.5)
7	Ширина рукава под проймой, см	все	21.7	22.3	23.0	23.7	24.4	25.1	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	С коротким рукавом С рукавом 3/4 С длинным рукавом	20.3 17.1 14.0	21.0 17.6 -	21.7 18.1 -	22.3 18.5 -	22.9 18.9 -	23.5 19.3 -	(+/-0.5)
9	Ширина кармана по линии входа, см	все	19.0	20.0	20.8	21.7	22.5	23.5	(+/-0.3)
10	Глубина кармана, см	все	19.8	19.8	19.8	19.8	20.0	20.0	(+/-0.3)
11	Длина воротника по отлету, см	все	44.7	45.5	46.3	47.2	48.2	49.2	(+/-0.5)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 153 из 529

В36. Халат медицинский женский модель 140-1.

Описание модели

Халат медицинский женский комбинированный из тканей двух цветов, длиной выше колен, полуприлегающего силуэта.

Перед с фигурным вырезом горловины; с центральной бортовой застежкой на кнопки: одна кнопка сверху сквозная, остальные-внутренние; с отрезными бочками; с двумя горизонтальными нагрудными вытачками, выходящими из швов притачивания бочков; с двумя нижними карманами с фигурными входами, обработанными в швах притачивания бочков ниже линии талии.

Спинка со средним швом, заканчивающимся плицей, и отрезными бочками.

Рукава втачные, трехшовные, состоящие из передней, центральной и задней частей; длиной 3/4. Низ рукавов должен быть обработан притачными отложными манжетами шириной 3,3-3,5 см. По центру манжета левого рукава может быть закреплен металлический логотип с фирменной символикой.

Воротник-стойка шириной 3,3-3,5 см.

Отрезные бочки полочек и спинки, передние и задние части рукавов, а также нижний воротник должны быть выполнены из отделочной ткани контрастного цвета.

По краям воротника, бортов, входам в карманы, горловине переда и шву втачивания воротника в горловину спинки должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

На правой полочке вдоль края борта должна быть проложена строчка на расстоянии 3,9-4,1 см от края.

Над карманами должны быть проложены сквозные строчки, закрепляющие мешковины.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,0-1,2 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом основной и отделочной тканей.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;

Рост: 164-170.

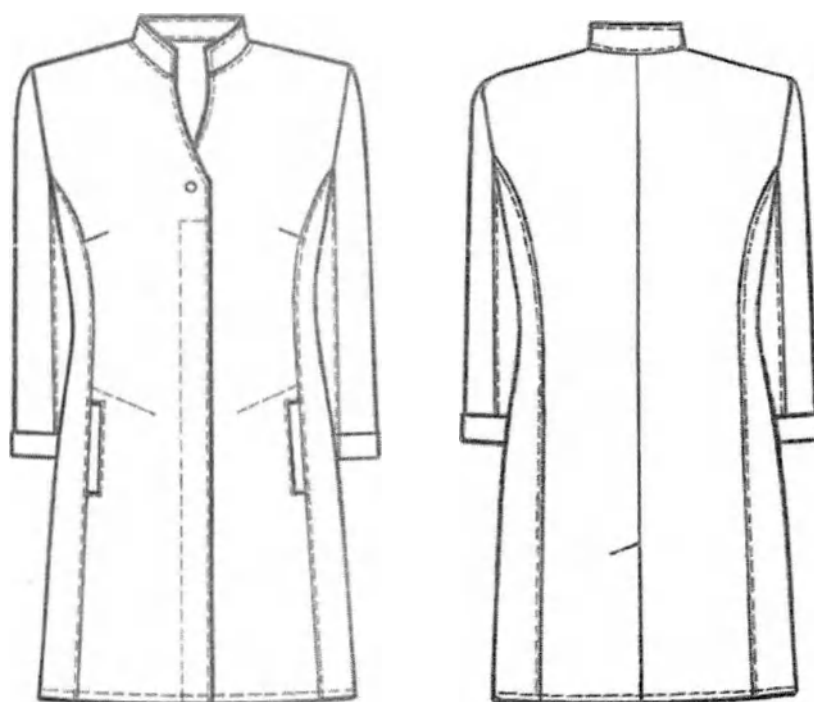


Рисунок В36– Халат медицинский женский модель 140-1

Таблица В36.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 140-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально	
Основная ткань				
1	Полочка	2	1	
2	Спинка	2	1	
3	Центральная часть рукава	2	1	
4	Манжета	2	1	
5	Воротник	1	0	
6	Мешковина кармана	4	2	
7	Подборт	2	1	
Отделочная ткань				
8	Бочок полочки	2	1	
9	Бочок спинки	2	1	
10	Передняя часть рукава	2	1	
11	Задняя часть рукава	2	1	
12	Воротник	1	0	
	ИТОГО	24	11	

Таблица В36.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 140-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер						Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	87,5	87,8	88,1	88,5	88,8	89,1	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	34,7	35,6	36,5	37,3	38,2	39,1	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	90,8	91,3	91,8	92,3	92,8	93,4	(+/-1)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	54,5	56,4	58,3	60,2	62,1	60,4	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	43,2	43,3	43,5	43,7	44,0	44,2	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	16,9	17,5	18,3	19,1	19,8	20,5	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	13,5	13,9	14,3	14,7	15,1	15,5	(+/-0,5)
9	Длина входа в карман, см	164-170	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	(+/-0,3)
10	Длина воротника по отлету, см	164-170	35,2	35,8	36,4	37,1	37,8	38,6	(+/-0,5)

Продолжение Таблицы В36.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер					Допуск, см
			52	54	56	58	60	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	89,4	89,7	90,0	90,4	90,8	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	39,8	40,6	41,4	42,2	43,0	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	94,0	94,6	95,3	96,1	97,0	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	65,9	67,8	69,7	71,6	73,5	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	44,5	44,6	44,7	44,9	45,0	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	21,2	22,0	22,7	23,3	24,0	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	15,9	16,3	16,7	17,1	17,5	(+/-0,5)
9	Длина входа в карман, см	164-170	13,8	14,3	14,3	14,3	14,3	(+/-0,3)
10	Длина воротника по отлету, см	164-170	39,4	40,1	40,9	41,7	42,5	(+/-0,5)

В37. Халат медицинский женский модель 142-1.

Описание модели

Халат медицинский женский из белой ткани, длиной выше колена, полуприлегающего силуэта. Внизу в боковых швах-разрезы с закругленными углами.

Перед с центральной бортовой застежкой на 9 кнопок (края бортов должны быть обработаны планками шириной 3,2-3,4 см); с притачными кокетками; с двумя вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа; с двумя верхними накладными карманами, передними срезами входящими в рельефные швы на уровне груди; с двумя нижними накладными карманами с наклонными входами. Передние срезы нижних карманов должны входить в рельефные швы, а задние – в боковые швы. На уровне линии талии на боковые части полочек должна быть настрочена с внутренней стороны эластичная тесьма шириной 4,0 см, обеспечивая прилегание по линии талии.

Спинка с притачной кокеткой, с вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа. На уровне линии талии на боковые части спинки должна быть настрочена с внутренней стороны эластичная тесьма шириной 4,0 см, обеспечивая прилегание по линии талии.

Рукава втачные, одношовные, длинные.

Воротник-стойка шириной 3,2-3,4 см.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA¹ по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

По кокеткам, рельефам, краям бортов, воротника, низу изделия, шву втачивания воротника в горловину и швам настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По верхним краям карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,4-2,6 см от края.

По низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 3,4-3,6 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,0-1,1 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки белого цвета.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

Рост: 164-170.



Рисунок В37– Халат медицинский женский модель 142-1

Таблица В37.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 142-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	1	0
4	Бочок спинки	2	1
5	Рукав	2	1
6	Планка застежки	2	1
7	Кокетка полочки	2	1
8	Кокетка спинки	1	0

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
9	Верхний карман	2	1
10	Нижний карман	2	1
11	Воротник	2	1
12	Подборт	2	1
	Итого	22	10

Таблица В37.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 142-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	87,0	87,5	88,0	88,7	89,5	90,0	90,5	91,0	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	36,5	37,4	38,3	39,3	40,2	41,2	42,0	42,8	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	89,0	90,0	91,0	92,0	92,8	93,7	94,6	95,4	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	46,3	48,3	50,3	52,3	54,3	56,3	58,4	60,5	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	53,0	55,4	57,8	60,2	62,6	65,0	67,2	69,5	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	57,3	57,5	57,6	57,8	57,9	58,1	58,3	58,5	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,6	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	12,7	12,8	13,0	13,2	13,4	13,6	13,8	14,2	(+/-0,5)
	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	164-170	8,0	8,3	8,6	8,8	9,1	9,4	9,7	10,0	(+/-0,3)
	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	164-170	11,6	11,7	11,8	11,9	12,1	12,2	12,4	12,5	(+/-0,3)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	15,3	15,9	16,6	17,3	18,1	18,7	19,4	20,3	(+/-0,3)
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	164-170	19,5	19,7	19,8	19,9	19,9	20,0	20,0	20,0	(+/-0,3)
11	Длина воротника по отлету, см	164-170	38,9	39,9	40,8	41,7	42,5	43,5	44,5	45,3	(+/-0,5)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 158 из 529

В38. Халат медицинский женский модель 151-1.

Описание модели

Халат медицинский женский укороченный (длина – на 15 см выше колена); полуприлегающего силуэта, слегка расширенный книзу (расширение = 3,0 см).

Перед с отложными лацканами до линии груди; с центральной бортовой застёжкой на 5 обметанных петель и 5 пуговиц; с закругленными нижними углами бортов; с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с дополнительными вертикальными швами, выходящими из нижней части пройм и доходящими до низа; с двумя нижними накладными карманами с закруглёнными углами и наклонными входами; с клапанами над ними, передние углы которых закруглены; с одним дополнительным клапаном с закруглёнными передним углом, расположенным над левым карманом.

Спинка со средним швом, заканчивающимся шлицей; с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа.

Рукава втачные, двухшовные, длинные или 3/4 (по желанию заказчика); локтевые швы заканчиваются шлицами с тремя декоративными пуговицами.

Воротник отложной, с закруглёнными углами.

По бортам, воротнику, низу изделия, горловине переда, рельефам, локтевым швам рукавов, краям клапанов, шву втачивания воротника в горловину спинки и швам настрачивания карманов должны быть проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

Вдоль швов настрачивания клапанов должны быть проложены строчки на расстоянии 0,6-0,7 см от шва.

Вдоль шлиц рукавов должны быть проложены строчки на расстоянии 2,9-3,1 см от края.

По низу рукавов должны быть проложены строчки на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические или пластиковые пуговицы: диаметр 1,6-1,8 см – для застёжки и диаметр 1,1-1,3 см – для шлиц рукавов.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

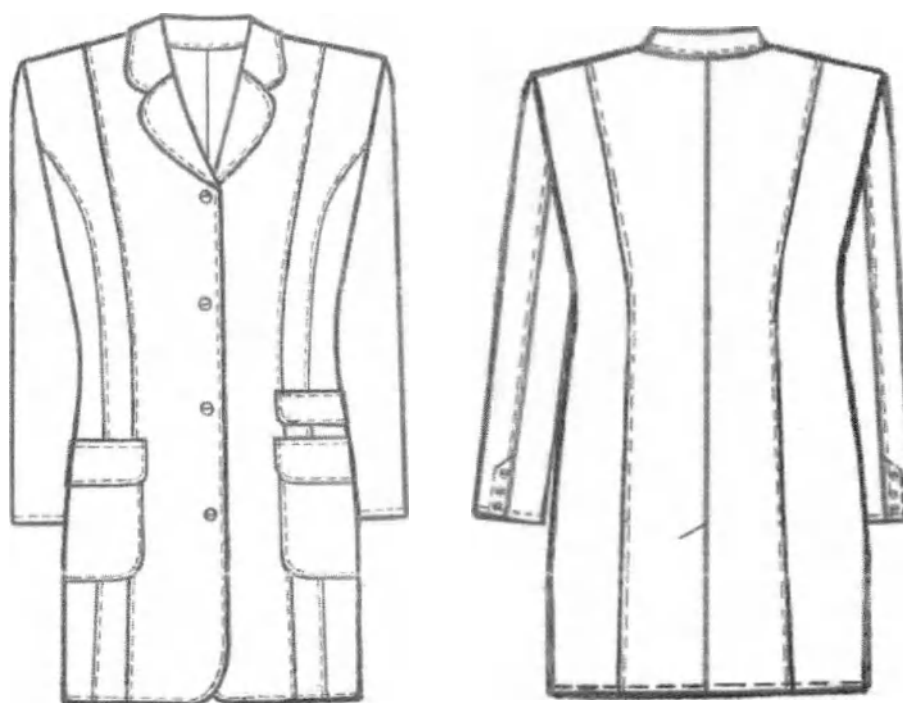


Рисунок В38– Халат медицинский женский модель 151-1

Таблица В38.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 151-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Центральная часть полочки	2	1
2	Средняя часть полочки	2	1
3	Боковая часть полочки	2	1
4	Спинка	2	1
5	Бочок спинки	2	1
6	Передняя часть рукава	2	1
7	Задняя часть рукава	2	1
8	Карман	2	1
9	Верхний клапан	2	1
10	Нижний клапан	4	2
11	Воротник	2	1
12	Подборт	2	1
13	Обтачка кармана	2	1
	ИТОГО	28	14

Таблица В38.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 151-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	77.4	77.8	78.2	78.7	79.2	79.6	80.0	80.4	(±)1.0
		164-170	83.4	83.8	84.2	84.7	85.2	85.6	86.0	86.4	
		176-182	86.4	86.8	87.2	87.7	88.2	88.6	89.0	89.4	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	(±)0.5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	79,7 85,7 88,7	80,5 86,5 89,5	81,3 87,3 90,3	82,2 88,2 91,2	83,0 89,0 92,0	83,9 89,9 92,9	84,8 90,8 93,8	85,6 91,6 94,6	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,1	56,2	58,3	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,1	66,2	68,3	(+/-)1,0
6	Длина рукава (длинные), см	152-158 164-170 176-182	58,2 62,2 64,2	58,4 62,4 64,4	58,5 62,5 64,5	58,7 62,7 64,7	58,8 62,8 64,8	58,9 62,9 64,9	59,0 63,0 65,0	59,2 63,2 65,2	(+/-)1,0
7	Длина рукава 3/4, см	152-158 164-170 176-182	40,9 43,9 45,4	41,1 44,1 45,6	41,3 44,3 45,8	41,5 44,5 46,0	41,7 44,7 46,2	41,9 44,9 46,4	42,1 45,1 46,6	42,3 45,3 46,8	(+/-)1,0
8	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,3	18,0	18,7	19,3	20,0	20,8	21,5	22,2	(+/-)0,5
9	Ширина рукава внизу (длинные рукава), см	все роста	11,9	12,2	12,5	12,8	13,0	13,3	13,5	13,7	(+/-)0,5
10	Ширина рукава внизу (рукава 3/4), см	все роста	15,7	16,0	16,3	16,5	16,8	17,0	17,3	17,6	(+/-)0,5
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	15,2	15,5	15,6	15,6	16,3	16,3	17,0	17,0	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана посередине, см	все роста	16,6	16,6	16,6	16,7	16,7	16,7	17,0	17,0	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлёту, см	все роста	39,8	40,6	41,3	42,0	42,8	43,5	44,2	44,9	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В38.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	80,8 86,8 89,8	81,0 87,0 90,0	81,3 87,3 90,3	81,6 87,6 90,6	82,0 88,0 91,0	82,4 88,4 91,4	82,8 88,8 91,8	83,2 89,2 92,2	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	86,4 92,4 95,4	87,4 93,4 96,4	88,3 94,3 97,3	89,2 95,2 98,2	90,1 96,1 99,1	91,0 97,0 100,0	91,9 97,9 100,9	92,8 98,8 101,8	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,4	62,5	64,6	66,8	69,0	71,2	73,4	75,6	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	70,4	72,5	74,6	76,8	79,0	81,2	83,4	85,6	(+/-)1,0
6	Длина рукава (длинные), см	152-158 164-170 176-182	59,4 63,4 65,4	59,6 63,6 65,6	59,7 63,7 65,7	59,8 63,8 65,8	59,9 63,9 65,9	60,0 64,0 66,0	60,1 64,1 66,1	60,2 64,2 66,2	(+/-)1,0
7	Длина рукава 3/4, см	152-158 164-170 176-182	42,5 45,5 47,0	42,7 45,7 47,2	42,9 45,9 47,4	43,2 46,2 47,7	43,4 46,4 47,9	43,6 46,6 48,1	43,8 46,8 48,3	44,0 47,0 48,5	(+/-)1,0
8	Ширина рукава под проймой, см	все роста	23,0	23,7	24,4	25,1	25,8	26,5	27,2	27,9	(+/-)0,5
9	Ширина рукава внизу (длинные рукава), см	все роста	14,0	14,2	14,5	14,7	15,0	15,2	15,5	15,7	(+/-)0,5
10	Ширина рукава внизу (рукава 3/4), см	все роста	17,8	18,1	18,4	18,8	19,2	19,6	20,0	20,5	(+/-)0,5
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	18,0	18,0	18,7	18,7	19,5	19,5	20,3	20,3	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана посередине, см	все роста	17,4	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6	17,8	17,8	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлёту, см	все роста	45,6	46,4	47,2	48,0	48,8	49,6	50,4	51,2	(+/-)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В39. Халат медицинский женский модель 159-1.

Описание модели

Халат медицинский женский из белой или гладкокрашеной ткани длиной выше колена, полуприлегающего силуэта, слегка расширенный к низу (расширение = 3 см); с притачной кокеткой (на спинке выше уровня лопаток, по переду шириной от 4,0 см у горловины до 7,0 см у пройм); с разрезами в боковых швах; со съёмным завязывающимся поясом.

Перед с центральной бортовой застежкой на 8 обметанных петель и 8 пуговиц; с рельефными швами, выходящими из пройм и доходящими до низа; с декоративной фигурной листочкой на левой полочке выше линии груди; двумя нижними накладными карманами, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы. Карманы оформлены сверху притачными планками шириной 3,5-3,7 см и декоративными патами шириной 3,3-3,5 см, одним концом вшитыми в рельефы, а другим концом пристегивающимися к планкам карманов с помощью пуговиц. На карманах застрочены складки, имитирующие вертикальные планки.

Спинка с вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа.

Рукава втачные, одношовные, длиной 5/6, с широкими фигурными манжетами.

Воротник-стойка шириной 3,4-3,6 см, застегивающаяся спереди на одну обметанную петлю и одну пуговицу.

Пояс из основной ткани шириной 3,6-3,8 см с тремя настроченными шлевками, в которые продета репсовая лента контрастного цвета шириной 1,3-1,5 см.

По кокетке, рельефам, краям бортов, манжет, воротника, листочки, пояса, шлевок, планок и пат карманов, швам притачивания планок, манжет и швам настрачивания карманов проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 см края или шва.

По низу изделия проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от подогнутого края.

В качестве фурнитуры используются пластмассовые пуговицы диаметром 1,5-1,7 см и репсовая лента контрастного цвета.

Нитки для изготовления изделия используются в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.



Рисунок В39– Халат медицинский женский модель 159-1

Таблица В39.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 159-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	1	0
4	Бочок спинки	2	1
5	Кокетка	1	0
6	Листочка	1	0
7	Нижний карман	2	1
8	Планка нижнего кармана	2	1
9	Пата нижнего кармана	2	1
10	Рукав	2	1
11	Манжета	2	1
12	Воротник	2	1
13	Пояс	1	0
14	Подборг	2	1
15	Шлевки	1	0
	Прокладочный материал		
16	Пояс (клеевая)	1	0
	Итого	26	10

Таблица В39.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 159-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	79,3	79,5	79,8	80,1	80,7	81,1	81,4	82,1	(±/-1)
		164-170	85,3	85,5	85,8	86,1	86,7	87,1	87,4	88,1	
		176-182	91,3	91,5	91,8	92,1	92,7	93,1	93,4	94,1	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	36,0	36,8	37,6	38,4	39,3	40,2	41,1	42,0	(±/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	80,7	81,6	82,5	83,4	84,0	84,7	85,6	86,5	(±/-1)
		164-170	86,7	87,6	88,5	89,4	90,0	90,7	91,6	92,5	
		176-182	91,7	93,6	94,5	95,4	96,0	96,7	97,6	98,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,8	46,6	48,4	50,2	52,0	54,2	56,4	58,6	(±/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	54,5	56,3	58,0	59,7	61,5	63,3	65,0	67,0	(±/-1)
6	Длина рукава, см	152-158	45,0	45,3	45,6	46,0	46,2	46,5	46,8	47,0	(±/-0,5)
		164-170	48,0	48,3	48,6	49,0	49,2	49,5	49,8	50,0	
		176-182	49,5	49,8	50,1	50,5	50,7	51,0	51,3	51,5	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,6	18,3	19,1	19,8	20,5	21,1	21,9	22,6	(±/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	12,9	13,5	14,0	14,5	15,0	15,6	16,2	16,7	(±/-0,5)
9	Ширина кармана по линии входа, см	все роста	14,3	15,0	15,7	16,5	17,3	18,0	18,8	19,6	(±/-0,3)
10	Глубина кармана, см	все роста	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	18,2	18,2	18,4	(±/-0,3)
11	Длина воротника по отлету, см	все роста	43,0	43,9	44,9	45,8	46,8	48,0	49,2	50,4	(±/-0,5)

Продолжение Таблицы В39.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	82,8	83,7	84,6	85,5	86,4	87,3	88,3	89,3	(±/-1)
		164-170	88,8	89,7	90,6	91,5	92,4	93,3	94,3	95,3	
		176-182	94,8	95,7	96,6	97,5	98,4	99,3	100,3	101,3	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	42,8	43,7	44,4	45,0	45,5	46,0	46,5	47,0	(±/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	88,0	90,0	91,8	93,6	95,5	97,5	99,5	101,5	(±/-1)
		164-170	94,0	96,0	97,8	99,6	101,5	103,5	105,5	107,5	
		176-182	100,0	102,0	103,8	105,6	107,5	109,5	111,5	113,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,6	62,7	64,8	66,9	69,0	71,2	73,4	75,6	(±/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	81,0	83,0	(±/-1)
6	Длина рукава, см	152-158	47,2	47,4	47,6	47,8	48,0	48,2	48,4	48,6	(±/-0,5)
		164-170	50,2	50,4	50,6	50,8	51,0	51,2	51,4	51,6	
		176-182	51,7	51,9	52,1	52,3	52,5	52,7	52,9	53,1	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	23,5	24,2	25,0	25,8	26,6	27,5	28,2	29,0	(±/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	17,2	17,8	18,3	18,8	19,3	19,8	20,4	21,0	(±/-0,5)
9	Ширина кармана по линии входа, см	все роста	20,3	21,0	21,7	22,4	23,1	23,8	24,5	25,2	(±/-0,3)
10	Глубина кармана, см	все роста	18,5	18,5	18,5	18,7	18,7	19,0	19,0	19,0	(±/-0,3)
11	Длина воротника по отлету, см	все роста	51,4	52,5	53,5	54,5	55,5	56,5	57,5	58,5	(±/-0,5)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоцелевого использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 164 из 529

В40. Халат медицинский женский модель 160.

Описание модели

Халат медицинский женский длиной до середины колена; полуприлегающего силуэта, слегка расширенный книзу (расширение=3,0см); с притачной кокеткой (на спинке выше уровня лопаток, а на передке шириной 5,0см); с разрезами в боковых швах; без воротника, с круглым вырезом горловины, обработанным планкой шириной 3,3см с закругленными спереди углами. Швы притачивания кокетки и края планки горловины оформлены декоративным кантом шириной 0,3см с наполнителем.

Перед с центральной бортовой застёжкой на 8 обметанных петель и 8 пуговиц; отрезной ниже линии талии; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокетки и заканчивающимися в шве подреза; с двумя нижними накладными карманами с закругленными углами. Верх карманов оформлен отрезными планками шириной 3,0 см. В швы рельефов и швы притачивания планок карманов проложен кант шириной 0,3см с наполнителем.

Спинка с вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скреплёнными посередине спинки с помощью пуговицы.

Рукава втачные, одношовные, длиной 3/4. Низ каждого рукава оформлен притачной манжетой шириной 3,5 см.

По краям бортов, горловины, рельефам передка и спинки, швам притачивания кокетки, планок карманов и манжет, краям полупоясов, разрезов, а также швам настрачивания карманов проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от шва.

По низу изделия проложена строчка на расстоянии 1,5см от подогнутого края.

Для отделки используется кант в контрастном сочетании с цветом ткани.

В качестве фурнитуры используются пластмассовые пуговицы диаметром 1,8 см.

Нитки используются в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

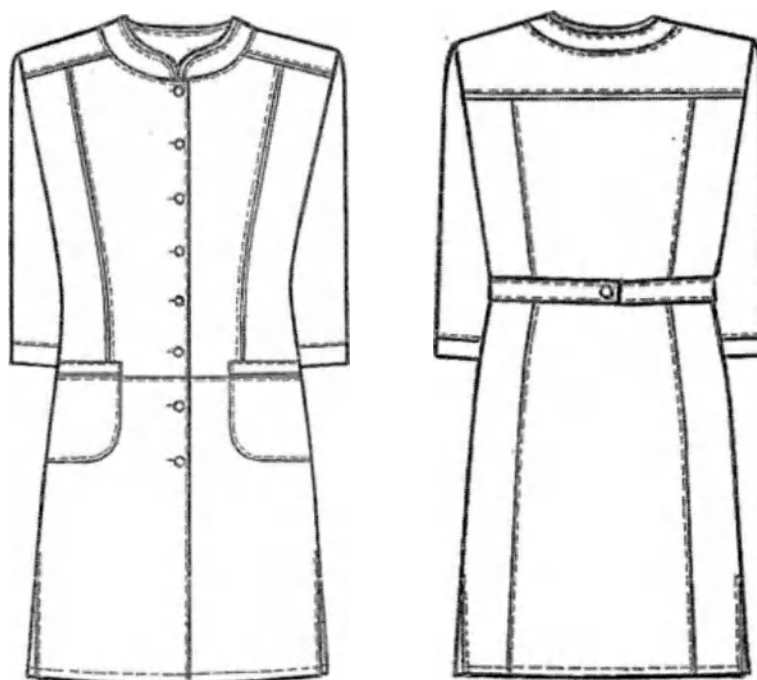


Рисунок В40–Халат медицинский женский модель 160

Таблица В40.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 160

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Нижняя часть полочки	2	1
4	Кокетка	1	0
5	Спинка	1	0
6	Бочок спинки	2	1
7	Верхняя часть кармана	2	1
8	Нижняя часть кармана	2	1
9	Рукав	2	1
10	Манжета рукава	2	1
11	Воротник	2	1
12	Обтачка горловины спинки	1	0
13	Подборт	2	1
14	Полупояс	2	1
	ИТОГО	25	11

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 166 из 529

Таблица В40.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 160

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	94,0 100,0 103,0	94,5 100,5 103,5	95,0 101,0 104,0	95,5 101,5 104,5	96,0 102,0 105,0	96,4 102,4 105,4	96,9 102,9 105,9	97,3 103,3 106,3	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,3	36,3	37,2	38,2	39,1	40,0	40,8	41,5	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	95,7 101,7 104,7	96,6 102,6 105,6	97,5 103,5 106,5	98,3 104,3 107,3	99,1 105,1 108,1	99,8 105,8 108,8	100,7 106,7 109,7	101,4 107,4 110,4	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	152-158 164-170 176-182	56,5 57,5 58,0	58,5 59,5 60,0	60,5 61,5 62,0	62,5 63,5 64,0	64,5 65,5 66,0	66,5 67,5 68,0	68,5 69,5 70,0	70,5 71,5 72,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	36,0 39,0 40,5	36,1 39,1 40,6	36,3 39,3 40,8	36,4 39,4 40,9	36,6 39,6 41,1	37,0 40,0 41,5	37,3 40,3 41,8	37,5 40,5 42,0	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	18,2	18,7	19,3	19,9	20,5	21,1	21,8	22,5	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,4	16,7	17,1	17,4	17,6	17,9	18,3	18,7	(+/-0,5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	14,5	15,0	15,0	16,0	16,0	17,0	17,0	18,0	(+/-0,3)
10	Глубина нижнего кармана посередине, см	все роста	16,9	17,4	17,4	17,9	17,9	18,4	18,4	18,9	(+/-0,3)

Продолжение Таблицы В40.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	97,7 103,7 106,7	98,1 104,1 107,1	98,5 105,4 107,5	98,9 104,9 107,9	99,3 105,3 108,3	99,7 105,7 108,7	100,1 106,1 109,1	100,5 106,5 109,5	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	42,4	43,3	44,2	45,1	46,0	46,8	47,6	48,4	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	102,5 108,5 111,5	103,5 109,5 112,5	104,5 110,5 113,5	105,5 111,5 114,5	106,5 112,5 115,5	107,5 113,5 116,5	108,5 114,5 117,5	109,5 115,5 118,5	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,2	62,5	64,7	67,0	69,2	71,4	73,6	75,8	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	152-158 164-170 176-182	72,5 73,5 74,0	74,5 75,5 76,0	76,5 77,5 78,0	78,5 79,5 80,0	80,5 81,5 82,0	82,5 83,5 84,0	84,5 85,5 86,0	86,5 87,5 88,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	37,7 40,7 42,2	37,9 40,9 42,4	38,2 41,2 42,7	38,5 41,5 43,0	38,7 41,7 43,2	39,0 42,0 43,5	39,2 42,2 43,7	39,4 42,4 43,9	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	23,3	24,2	25,0	25,8	26,5	27,0	27,6	28,2	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	19,1	19,6	20,1	20,7	21,3	21,8	22,2	22,6	(+/-0,5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	18,0	18,0	19,4	19,4	19,4	19,4	20,3	20,3	(+/-0,3)
10	Глубина нижнего кармана посередине, см	все роста	18,9	18,9	19,6	19,6	19,6	19,6	20,3	20,3	(+/-0,3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 167 из 529

В41. Халат медицинский женский модель 161.

Описание модели

Халат медицинский женский из белой или гладкокрашенной ткани (ТиСи) длиной до колена, полуприлегающего силуэта, слегка расклешенный к низу (расширение = 3,5 см); без воротника, с асимметричным V-образным вырезом горловины, обработанным обтачкой.

Перед с двумя горизонтальными нагрудными вытачками; с косым подрезом, выходящим из угла горловины и являющимся продолжением её правой стороны и заканчивающимся в левом боковом шве в области талии; сверху в шве притачивания подреза обработан разрез длиной 10-12 см для застежки. Застежка обработана в нижнем углу горловины на 1 навесную петлю из ткани, пришитую к левой верхней части переда, и 1 пуговицу, пришитую к правой верхней части переда. С левой стороны в шве нижнего косого подреза, выходящего из правого бокового шва выше линии талии и заканчивающегося в левом боковом шве выше линии бедер, обработан карман. Карман застегивается на 1 навесную петлю из ткани, вшитую в шов нижнего подреза на уровне середины кармана, и 1 пуговицу, пришитую на нижнюю часть переда под петлей.

Спинка со средним швом, заканчивающимся шлицей; с центральной застежкой на потайную тесьму-«молнию»; с рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа.

Рукава втачные, двухшовные (с нижними и средними швами), короткие. В нижней части средних швов обработаны дугообразные разрезы, а на высоте 2-2,2 см от низа рукавов пришиты по 1 навесной петле из ткани (на передних частях рукавов) и по 1 пуговице (на задних частях). Низ рукавов подшит швом вподгибку с закрытым срезом, строчка проходит на расстоянии 1,8-2,0 см от подогнутого края.

Левая верхняя часть переда и навесные петли могут быть выполнены из отделочной ткани.

По вырезу горловины, рельефам, подрезам, краям разрезов и средним швам рукавов проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

Низ изделия подшит швом вподгибку с закрытым срезом, строчка должна проходить на расстоянии 2,9-3,1 см. от подогнутого края.

В качестве фурнитуры используется потайная тесьма-«молния» длиной 50-60 см, металлические пуговицы диаметром 18 мм – для горловины и кармана, диаметром 15 мм – для рукавов.

Нитки для изготовления изделия должны использоваться в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 168 из 529

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

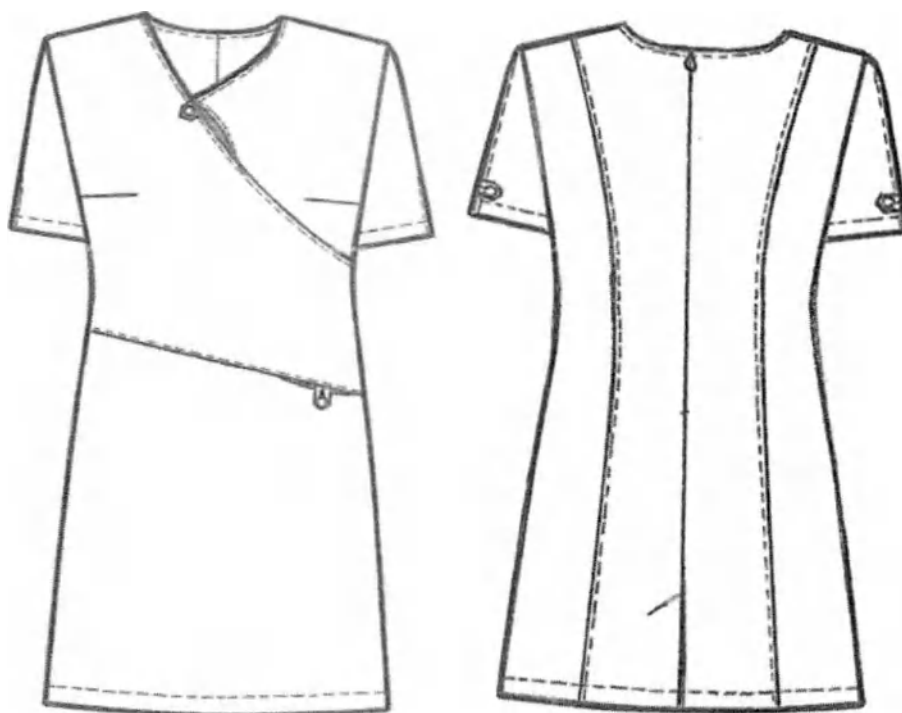


Рисунок В41–Халат медицинский женский модель 161

Таблица В41.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 161

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет. кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Правая верхняя часть переда	1	0
2	Нижняя часть переда	1	0
3	Центральная часть спинки	2	1
4	Бочок спинки	2	1
5	Передняя часть рукава	2	1
6	Задняя часть рукава	2	1
7	Мешковина кармана	2	1
8	Обтачка разреза рукава	4	2
9	Правая обтачка горловины переда	1	0
10	Обтачка горловины спинки	2	1
Отделочная ткань			
11	Левая верхняя часть переда	1	0
12	Левая обтачка горловины переда	1	0
13	Петли	1	0
	ИТОГО	22	8

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 169 из 529

Таблица В41.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Халат медицинский женский модель 161

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	81,4 87,4 90,4	81,6 87,6 90,6	81,8 87,8 90,8	82,1 88,1 91,1	82,4 88,4 91,4	82,7 88,7 91,7	83,0 89,0 92,0	83,1 89,1 92,1	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	33,5	34,5	35,6	36,7	38,0	38,6	39,5	40,4	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	85,4 91,4 94,4	86,2 92,2 95,2	87,0 93,0 96,0	87,8 93,8 96,8	88,5 94,5 97,5	89,2 95,2 98,2	90,0 96,0 99,0	90,6 96,6 99,6	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,2	46,2	48,2	50,2	52,2	54,2	56,2	58,2	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	24,0 26,0 27,0	24,2 26,2 27,2	24,3 26,3 27,3	24,4 26,4 27,4	24,6 26,6 27,6	24,8 26,8 27,8	25,1 27,1 28,1	25,2 27,2 28,2	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,5	18,2	18,8	19,4	20,1	20,8	21,5	22,3	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,7	19,5	20,3	(+/-0,5)
9	Длина кармана по линии входа, см	все роста	15,0	15,0	15,5	15,5	15,5	16,0	16,0	16,0	(+/-0,3)

Продолжение Таблицы В41.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	83,3 89,3 92,3	83,5 89,5 92,5	83,8 89,8 92,8	84,0 90,0 93,0	84,2 90,2 93,2	84,4 90,4 93,4	84,6 90,6 93,6	84,8 90,8 93,8	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	41,3	42,2	43,1	44,0	44,8	45,2	46,0	46,7	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	91,2 97,2 100,2	91,8 97,8 100,8	92,5 98,5 101,5	93,2 99,2 102,2	93,9 99,9 102,9	94,6 100,6 103,6	95,2 101,2 104,2	95,8 101,8 104,8	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,2	62,2	64,2	66,2	68,2	70,2	72,2	74,2	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	81,0	83,0	85,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	25,4 27,4 28,4	25,6 27,6 28,6	25,8 27,8 28,8	26,0 28,0 29,0	26,2 28,2 29,2	26,4 28,4 29,4	26,6 28,6 29,6	26,8 28,8 29,8	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	23,1	23,8	24,5	25,2	25,9	26,8	27,5	28,2	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	21,1	21,7	22,3	23,0	23,6	24,2	24,8	25,4	(+/-0,5)
9	Длина кармана по линии входа, см	все роста	16,0	16,5	16,5	16,5	17,0	17,0	17,0	17,0	(+/-0,3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоцелевого использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 170 из 529

В42. Халат медицинский женский модель 162.

Описание модели

Халат медицинский женский из белой ткани с плавным переходом длины: сзади до колен, спереди короче на 7 см; с притачной кокеткой (на спинке выше уровня лопаток, спереди шириной 4,0 см; без вороника, с круглым вырезом горловины, обработанным притачной планкой шириной 2,6-2,8 см.

Перед с центральной бортовой застежкой; с рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокетки, идущими вертикально до линии талии и широко расходящимися к низу; с карманами в рельефах; с дугообразным подрезом ниже линии груди, заканчивающимся в боковых швах на уровне линии талии. Борта обработаны планками шириной 2,6-2,8 см. На средние части полочек настроено 3 вертикальных ряда кружевной тесьмы шириной 1,0-1,3 см.

Спинка со средним швом, заканчивающимся плечей; двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скрепленными посередине спинки с помощью пуговицы.

Рукава втачные, одношовные, длиной выше локтя, с притачными отложными манжетами шириной 3,4-3,6 см.

По кокетке, рельефам, подрезу, краям планок и нижним краям поясов должны быть проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от подогнутого края.

В качестве фурнитуры используются пластмассовые пуговицы диаметром 1,6-1,8 см.

Для изготовления изделия должны использоваться белые нитки.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.



Рисунок В42–Халат медицинский женский модель 162

Таблица В42.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 162

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет. кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Верхняя центральная часть полочки	2	1
2	Верхняя боковая часть полочки	2	1
3	Нижняя центральная часть полочки	2	1
4	Нижняя боковая часть полочки	2	1
5	Кокетка	1	0
6	Спинка	2	1
7	Планка горловины	2	1
8	Планка под застежку	4	2
9	Рукав	2	1
10	Отворот рукава	2	1
11	Мешковина кармана	4	2
12	Полупояс	2	1
	ИТОГО	27	13

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 172 из 529

Таблица В42.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 162

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	97.9	98.1	98.3	98.5	98.7	99.0	99.1	99.5	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	35.5	36.8	37.8	38.6	39.8	40.7	41.6	42.4	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	93.9	94.3	94.9	95.8	96.5	97.3	98.1	99.0	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	47.1	49.2	51.3	53.4	55.5	57.6	59.8	62.0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	25.5	25.9	26.2	26.4	26.7	27.0	27.2	27.5	(+/-0.5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	18.2	18.7	19.1	19.5	20.1	20.9	21.7	22.5	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	16.9	17.1	17.6	18.2	18.8	19.3	20.0	20.8	(+/-0.5)
9	Длина входа в карман, см	164-170	14.0	14.0	14.0	14.0	14.7	14.7	15.2	15.2	(+/-0.3)

Продолжение Таблицы В42.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	100.0	100.8	101.3	101.5	101.7	102.0	102.3	102.6	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	43.1	43.9	44.6	45.2	46.0	46.8	47.6	48.4	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	99.6	100.6	101.6	102.6	103.6	104.6	105.7	106.8	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	64.2	66.3	68.4	70.5	72.6	74.7	76.8	78.9	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	72.0	74.0	76.0	78.0	80.0	82.0	84.0	86.0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	27.9	28.2	28.4	28.6	28.8	29.0	29.2	29.4	(+/-0.5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	23.5	24.2	24.9	25.6	26.3	27.0	27.7	28.4	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	21.4	22.0	22.7	23.3	23.9	24.5	25.2	25.8	(+/-0.5)
9	Длина входа в карман, см	164-170	15.5	15.5	15.5	15.5	16.0	16.0	16.0	16.0	(+/-0.3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 173 из 529

В43. Халат медицинский женский модель 163.

Описание модели

Халат медицинский женский из белой ткани длиной до колена, полуприлегающего силуэта, слегка расширенный к низу (расширение равно 4,0 см), с фигурным вырезом горловины, обработанным обтачкой.

Перед с центральной бортовой застежкой на 7 кнопок, с асимметричными сверху бортами; с отрезными кокетками; с рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа; с двумя верхними фигурными накладными карманами выше линии груди, заходящими на кокетки на 2,0-2,2 см; с двумя нижними боковыми карманами, обработанными в рельефных швах ниже линии талии. Мешковины карманов фигурной формы должны быть настроены на полочки по контуру.

Спинка с отрезной кокеткой; средним швом, заканчивающимся плищей; двумя рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне талии и скрепленные посередине спинки с помощью двух металлических полуколец, продетых в простроченную подгибку левого полупояса.

Рукава втачные, двухшовные, со средними и нижними швами. Задние части рукавов по средним швам длиннее, чем передние, в швах обработаны разрезы. Низ рукавов обработан обтачками, свободные края которых должны быть зафиксированы сквозными строчками.

По рельефам, кокеткам, горловине, краям бортов, средним швам, краям разрезов и низу рукавов, а также швам настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По линиям входов верхних карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,9-2,1 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические полукольца шириной 3,0-3,5 см и металлические кнопки диаметром 1,1-1,3 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки белого цвета.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 174 из 529



Рисунок В43–Халат медицинский женский модель 163

Таблица В43.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 163

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	2	1
4	Бочок спинки	2	1
5	Кокетка правой полочки	1	0
6	Кокетка левой полочки	1	0
7	Кокетка спинки	1	0
8	Передняя половинка рукава	2	1
9	Задняя половинка рукава	2	1
10	Верхний карман	2	1
11	Мешковина нижнего кармана	4	2
12	Правый полупояс	1	0
13	Левый полупояс	1	0
14	Подборт правой полочки	1	0
15	Подборт левой полочки	1	0
16	Обтачка горловины спинки	1	0
17	Передняя обтачка низа рукава	2	1
18	Задняя обтачка низа рукава	2	1
	ИТОГО	30	11

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 175 из 529

Таблица В43.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Халат медицинский женский модель 163

№	Наименование измерения	Рост	Размер						Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	
1	Длина спинки посередине, см	152-152	92.2	92.7	93.2	93.7	94.2	94.5	(±1)
		164-170	98.2	98.7	99.2	99.7	100.2	100.5	
		176-182	101.2	101.7	102.2	102.7	103.2	103.5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5	39.5	(±0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-152	95.4	96.3	97.0	97.8	98.7	99.6	(±1)
		164-170	101.4	102.3	103.0	103.8	104.7	105.6	
		176-182	104.4	105.3	106.0	106.8	107.7	108.6	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0	(±1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	56.0	58.0	60.0	61.8	63.6	65.4	(±1)
6	Длина рукава, см	152-152	43.0	43.2	43.4	43.6	43.8	43.9	(±1)
		164-170	47.0	47.2	47.4	47.6	47.8	47.9	
		176-182	49.0	49.2	49.4	49.6	49.8	49.9	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17.3	17.8	18.4	19.0	19.6	20.3	(±0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	13.5	13.9	14.3	14.8	15.2	15.7	(±0.5)
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	9.7	9.9	9.9	9.9	10.2	10.2	(±0.3)
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	10.7	11.0	11.0	11.0	11.3	11.3	(±0.3)

Продолжение Таблицы В43.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер						Допуск, см
			52	54	56	58	60	62	
1	Длина спинки посередине, см	152-152	94.7	95.0	95.3	95.6	95.9	96.2	(±1)
		164-170	100.7	101.0	101.3	101.6	101.9	102.2	
		176-182	103.7	104.0	104.3	104.6	104.9	105.2	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	40.4	41.3	42.2	43.0	43.8	44.4	(±0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-152	100.5	101.4	102.3	103.2	104.1	105.0	(±1)
		164-170	106.5	107.4	108.3	109.2	110.1	111.0	
		176-182	109.5	110.4	111.3	112.2	113.1	114.0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	56.0	58.0	60.0	62.1	64.2	66.3	(±1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	67.2	69.0	70.8	72.6	74.4	76.2	(±1)
6	Длина рукава, см	152-152	44.1	44.3	44.5	44.7	44.9	45.1	(±1)
		164-170	48.1	48.3	48.5	48.7	48.9	49.1	
		176-182	50.1	50.3	50.5	50.7	50.9	51.1	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	21.0	21.6	22.3	23.1	23.9	24.7	(±0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16.1	16.5	16.8	17.2	17.6	18.0	(±0.5)
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	10.7	10.7	11.1	11.1	11.7	11.7	(±0.3)
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	11.6	11.6	12.0	12.0	12.2	12.3	(±0.3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 176 из 529

В44. Халат медицинский женский модель 165.

Описание модели

Халат медицинский женский длиной до колен, полуприлегающего силуэта, слегка расширенный к низу (расширение=3,5см); с притачной кокеткой сзади выше уровня лопаток, а на передё шириной 5,0см; без воротника, с круглым вырезом горловины, обработанным обтачкой; с разрезами в боковых швах.

Перед с центральной бортовой застёжкой на 8 обметанных петель и 8 пуговиц на притачных планках шириной 3,4-3,6см; с косыми нагрудными вытачками; с наклонными подрезами, выходящими из боковых швов ниже линии талии и заканчивающимися в швах притачивания планок застёжки; с шестью вертикальными, слегка расходящимися заплатами глубиной 0,1-0,2см, выходящими из подрезов; с двумя боковыми накладными карманами фигурной формы.

Спинка с вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скреплёнными посередине спинки с помощью пуговицы.

Рукава втачные, одношовные, длиной 3/4. Низ каждого рукава должен быть оформлен притачной манжетой шириной 3,0-3,2 см и тремя слегка расходящимися заплатами глубиной 0,1-0,2см.

По кокетке, рельефам, подрезам, карманам, горловине, манжетам, планкам застёжки и нижним краям полупоясов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края.

По горловине изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 3,4-3,6 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры используются пластмассовые пуговицы диаметром 1,7см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.



Рисунок В44—Халат медицинский женский модель 165

Таблица В44.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 165

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Нижняя часть полочки	2	1
3	Кокетка	1	0
4	Спинка	1	0
5	Бочок спинки	2	1
6	Планка застежки	2	1
7	Карман	2	1
8	Рукав	2	1
9	Манжета рукава	2	1
10	Обтачка горловины полочки	2	1
11	Обтачка горловины спинки	1	0
12	Полупояс	2	1
	ИТОГО	21	9

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 178 из 529

Таблица В44.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 165

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	86,4 92,4 95,4	86,8 92,8 93,8	87,2 93,2 96,2	87,6 93,6 96,6	87,0 94,0 97,0	87,7 94,4 97,4	87,8 94,8 97,8	88,2 95,2 98,2	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	34,7	35,7	36,7	37,7	38,7	39,6	40,5	41,4	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	89,9 95,9 98,9	90,7 96,7 99,7	91,5 97,5 100,5	92,3 98,3 101,3	93,0 99,0 102,0	93,9 99,9 102,9	94,8 100,8 103,8	95,7 101,7 104,7	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,4	46,5	48,7	50,8	53,0	55,2	57,4	59,6	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	54,4	56,6	58,6	60,8	63,0	65,2	67,4	69,6	(+/-1)
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	43,8 46,8 48,3	43,9 46,9 48,4	44,0 47,04 8,5	44,1 47,1 48,6	44,2 47,2 48,7	44,4 47,4 48,9	44,6 47,6 49,1	44,8 47,8 49,3	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	18,1	18,8	19,5	20,2	20,9	21,6	22,3	23,0	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	14,7	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	(+/-0,5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	14,8	14,8	16,2	16,2	16,2	17,2	17,2	17,9	(+/-0,3)
10	Глубина нижнего кармана посередине, см	все роста	16,1	16,1	16,5	16,5	16,5	17,8	17,8	18,0	(+/-0,3)

Продолжение Таблицы В44.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	88,6 95,6 98,6	88,7 95,7 98,7	88,8 98,8 98,8	88,9 95,9 98,9	90,0 96,0 99,0	90,0 96,0 99,0	90,0 96,0 99,0	90,1 96,1 99,1	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	42,3	43,2	44,1	45,0	45,8	46,6	47,3	48,0	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	96,6 102,6 105,6	97,4 103,4 106,4	98,2 104,2 107,2	99,0 105,0 108,0	99,7 105,7 108,7	100,6 106,6 109,6	101,5 107,5 110,5	102,4 108,4 111,4	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	61,8	64,0	66,2	68,4	70,6	72,8	75,0	77,2	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	71,8	74,0	76,3	78,6	80,9	83,3	85,7	88,5	(+/-1)
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	45,0 48,0 49,5	45,1 48,1 49,6	45,3 48,3 49,8	45,4 48,4 49,9	45,6 48,6 50,1	45,8 48,8 50,3	46,2 49,2 50,7	46,5 49,5 51,0	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	23,7	24,4	25,1	25,8	26,5	27,2	28,0	28,8	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	17,2	17,7	18,1	18,5	19,0	19,5	20,1	20,5	(+/-0,5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	17,9	17,9	19,0	19,0	19,0	19,8	19,8	19,8	(+/-0,3)
10	Глубина нижнего кармана посередине, см	все роста	18,0	18,0	18,3	18,3	18,3	18,8	18,8	18,8	(+/-0,3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоцелевого использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 179 из 529

В45. Халат медицинский женский модель 166.

Описание модели

Халат медицинский женский полуприлегающего силуэта из белой или гладкокрашеной ткани длиной выше колена. Горловина изделия оформлена цельновыкроенной стойкой и обработана обтачкой.

Перед со средним швом; двумя наклонными вытачками, выходящими из горловины; двумя косыми подрезами, выходящими из среднего шва, проходящими через центр груди и заканчивающимися в боковых швах ниже линии проймы; двумя косыми подрезами, выходящими из среднего шва ниже линии талии и заканчивающимися в боковых швах; с двумя карманами в швах нижних подрезов; с двумя рельефными швами, выходящими из верхних подрезов и заканчивающимися в нижних. По краям входов в карманы выполнены закрепки длиной 0,8 см.

Спинка со средним швом; двумя наклонными вытачками, выходящими из горловины; с застежкой на потайную тесьму-«молнию» в среднем шве; с косыми подрезами, выходящими из боковых швов ниже линии проймы, являясь продолжением верхних подрезов переда, и сходящимися углом в среднем шве; с двумя вертикальными рельефными швами, выходящими из подрезов и доходящими до низа.

По рельефам и подрезам переда и спинки, среднему шву переда, краям разрезов и горловины проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

Рукава втачные короткие. Низ рукавов подшит швом вподгибку с закрытым срезом, строчка проходит на расстоянии 2,8-3,0 см от подогнутого края. На подгибку низа левого рукава по центру закреплен металлический логотип с фирменной символикой на репсовой ленте контрастного цвета.

Низ изделия подшит швом вподгибку с закрытым срезом, строчка должна проходить на расстоянии 2,8-3,0 см. от подогнутого края.

В качестве фурнитуры используется потайная тесьма-«молния» длиной 50-60 см.

Нитки для изготовления изделия должны использоваться в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

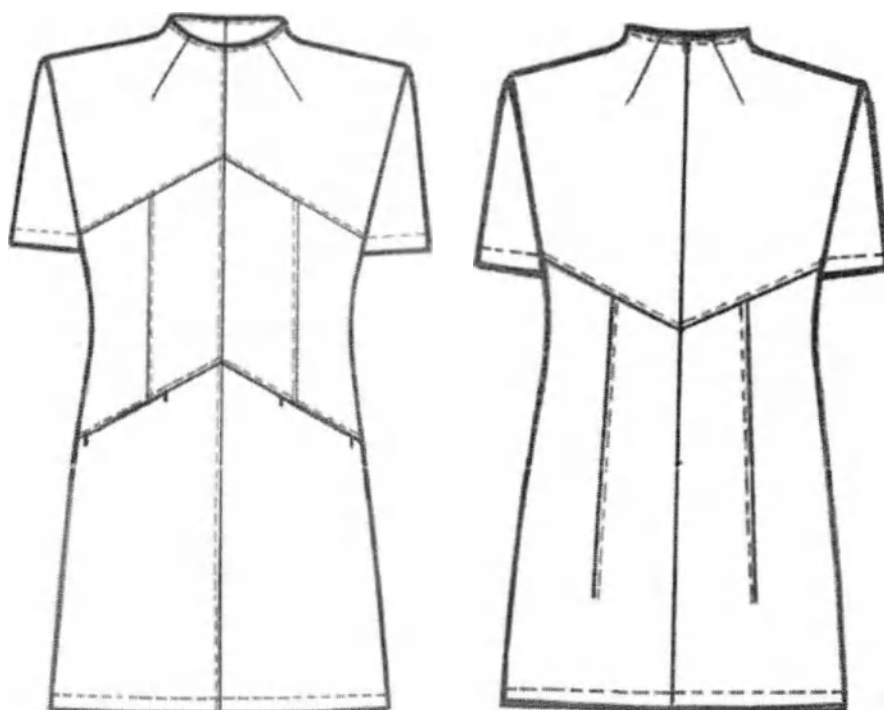


Рисунок В45–Халат медицинский женский модель 166

Таблица В45.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 166

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет. кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Верхняя часть полочки	2	1
2	Средняя часть полочки	2	1
3	Боковая часть полочки	2	1
4	Нижняя часть полочки	2	1
5	Верхняя часть спинки	2	1
6	Нижняя средняя часть спинки	2	1
7	Нижняя боковая часть спинки	2	1
8	Рукав	2	1
9	Мешковина кармана	4	2
10	Обтачка горловины переда	1	0
11	Обтачка горловины спинки	2	1
Прокладочный материал (клеевая)			
12	Обтачка горловины переда	1	0
13	Обтачка горловины спинки	2	1
ИТОГО		26	12

Таблица В45.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Халат медицинский женский модель 166

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	81,8	82,1	82,4	82,8	83,2	83,6	83,9	84,3	(+/-1)
		164-170	87,8	88,1	88,4	88,8	89,2	89,6	89,9	90,3	
		176-182	90,8	91,1	91,4	91,8	92,2	92,6	92,9	93,3	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	34,7	35,6	36,5	37,4	38,3	39,2	40,1	41,0	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	81,8	82,4	83,1	83,8	84,6	85,3	86,1	86,9	(+/-1)
		164-170	87,8	88,4	89,1	89,8	90,6	91,3	92,1	92,9	
		176-182	90,8	91,4	92,1	92,8	93,6	94,3	95,1	95,9	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	54,8	56,7	58,6	60,4	62,3	64,2	66,1	68,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	152-158	19,2	19,4	19,6	19,8	20,1	20,4	20,7	21,0	(+/-0,5)
		164-170	21,2	21,4	21,6	21,8	22,1	22,4	22,7	23,0	
		176-182	22,2	22,4	22,6	22,8	23,1	23,4	23,7	24,0	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	15,9	16,4	16,9	17,5	18,1	18,8	19,5	20,2	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,4	15,9	16,5	17,1	17,6	18,2	18,8	19,4	(+/-0,5)
9	Длина кармана по линии входа, см	все роста	13,4	13,4	14,5	14,5	15,5	15,5	15,5	16,5	(+/-0,3)

Продолжение Таблицы В45.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	84,6	84,9	85,2	85,5	85,8	86,1	86,4	86,7	(+/-1)
		164-170	90,6	90,9	91,2	91,5	91,8	92,1	92,4	92,7	
		176-182	93,6	93,9	94,2	94,5	94,8	95,1	95,4	95,7	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	41,9	42,7	43,5	44,3	45,1	45,9	46,6	47,3	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	87,7	88,5	89,3	90,1	90,9	91,7	92,5	93,3	(+/-1)
		164-170	93,7	94,5	95,3	96,1	96,9	97,7	98,5	99,3	
		176-182	96,7	97,5	98,3	99,1	99,9	100,7	101,5	102,3	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	84,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	152-158	21,3	21,6	21,9	22,2	22,5	22,8	23,1	23,4	(+/-0,5)
		164-170	23,3	23,6	23,9	24,2	24,5	24,8	25,1	25,4	
		176-182	24,3	24,6	24,9	25,2	25,5	25,8	26,1	26,4	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	21,0	21,8	22,5	23,2	23,9	24,6	25,3	26,0	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	20,0	20,6	21,2	21,8	22,4	23,0	23,6	24,2	(+/-0,5)
9	Длина кармана по линии входа, см	все роста	16,5	16,5	17,4	17,4	17,4	17,9	17,9	17,9	(+/-0,3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 182 из 529

В46. Халат медицинский женский модель 167.

Описание модели

Халат медицинский женский из ткани белого цвета длиной выше колена; полуприлегающего силуэта; со смещенными вперед плечевыми швами (у горловины на 2,0 см и у пройм на 3,5 см).

Перед со средним швом, нагрудными вытачками, выходящими из горловины; с отрезными бочками; с двумя боковыми карманами в швах притачивания бочков.

Спинка со средним швом; с застежкой в среднем шве на тесьму-«молнию» с двумя бегунками; с четырьмя талиевыми вытачками разной длины.

Рукава втачные, одношовные, длиной 3/4. Низ рукавов оформлен притачными манжетами шириной 4,8-5,0 см, состоящими из трех частей: передней, средней и задней.

Воротник-стойка шириной 3,0-3,2 см.

В средний шов переда вшита отделочная полоска шириной 1,1-1,2 см, заходящая на воротник. Отделочная полоска переда, правая передняя часть воротника и средние части манжет должны быть выполнены из ткани черного цвета.

По плечевым швам, швам притачивания бочков, манжет, краям воротника и шва притачивания отделочной полоски переда и тесьмы-«молнии» должны быть проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу изделия проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от подогнутого края.

По краям входов в боковые карманы должны быть установлены закрепки на спецмашине.

В качестве фурнитуры используется тесьма-«молния» длиной 90 см.

Для изготовления изделия используются нитки в тональном сочетании с цветом основной и отделочной ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.



Рисунок В46–Халат медицинский женский модель 167

Таблица В46.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 167

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	2	1
4	Рукав	2	1
5	Мешковина кармана	4	2
6	Передняя и задняя часть манжеты	4	2
7	Левая передняя часть воротника	2	1
8	Задняя часть воротника	4	2
9	Подборг	2	1
Отделочная ткань			
10	Отделочная полоска переда	1	0
11	Правая передняя часть воротника	2	1
12	Центральная часть манжеты	2	1
ИТОГО		29	14

Таблица В46.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Халат медицинский женский модель 167

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	36.3	37.0	37.7	38.5	39.3	40.0	40.7	41.4	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	89.2	89.5	89.8	90.1	90.4	90.7	91.0	91.4	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	46.5	48.5	50.5	52.5	54.5	56.5	58.5	60.5	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	52.5	54.5	56.4	58.4	60.3	62.3	64.2	66.2	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	43.8	44.0	44.2	44.6	44.8	45.0	45.3	45.5	(+/-0.5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	16.8	17.5	18.1	18.8	19.3	20.0	20.7	21.5	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	15.0	15.4	15.7	16.0	16.4	16.7	17.1	17.5	(+/-0.5)
9	Длина входа в карман, см	164-170	13.5	13.5	14.0	14.5	15.0	15.0	15.2	15.5	(+/-0.3)
10	Длина воротника по отлету, см	164-170	37.0	37.8	38.5	39.2	40.0	41.1	42.2	43.0	(+/-0.5)

Продолжение Таблицы В46.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	42.1	42.8	43.5	44.2	44.9	45.6	46.3	47.0	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	91.8	92.2	92.6	93.0	93.4	93.8	94.2	94.6	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	62.5	64.5	66.5	68.5	70.5	72.5	74.5	76.5	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	68.1	70.0	71.9	73.8	75.7	77.6	79.5	81.4	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	45.7	45.9	46.1	46.3	46.5	46.7	46.9	47.1	(+/-0.5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	22.4	23.3	24.1	24.9	25.6	26.4	27.1	27.8	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	17.9	18.4	18.8	19.2	19.6	20.0	20.4	20.8	(+/-0.5)
9	Длина входа в карман, см	164-170	15.5	16.0	16.0	16.0	16.5	16.5	16.5	16.5	(+/-0.3)
10	Длина воротника по отлету, см	164-170	43.8	44.6	45.4	46.2	47.0	47.8	48.6	49.4	(+/-0.5)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 185 из 529

В47. Халат медицинский женский модель 168.

Описание модели

Халат медицинский женский из белой ткани укороченный (длиной выше колена) полуприлегающего силуэта. Халат без воротника, с овальным вырезом горловины, обработанным обтачкой и с закругленной линией низа, слегка удлиненный сзади.

Перед с центральной бортовой застежкой на 8 кнопок; с притачными кокетками; с расходящимися к низу рельефными швами, которые выходят из швов притачивания кокеток и доходят до низа; с двумя боковыми карманами с фигурными входами, обработанными в рельефных швах ниже линии талии. На горловине правой полочки должна быть обработана декоративная планка шириной 3-3,5 см., выполненная из отделочной ткани (контрастного цвета или с набивным рисунком) по желанию заказчика.

Спинка с отрезной кокеткой; рельефными швами, которые выходят из шва притачивания кокетки и доходят до низа; с двумя полупоясами шириной 2,7-2,9 см., вшитыми одним концом в рельефы на уровне линии талии и скрепленными посередине спинки при помощи двух полуколец, продетых в застроченную подгибку левого полупояса.

Рукава втачные, одношовные, длиной 3/4. По низу рукавов параллельно подгибке должны быть заложены складки глубиной 2,9-3,1 см. на расстоянии 2 см. от низа.

Видимые мешковины карманов так же, как и планка горловины должны быть выполнены из отделочной ткани (сатори контрастного цвета или стрейч с принтом).

По рельефам, кокеткам, входам в карманы, а также по краям бортов, горловины, полупоясов и отделочной планки должны быть проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 см. от края или шва.

Низ изделия подшит швом вподгибку с закрытым срезом, строчка должна проходить на расстоянии 0,8-1,0 см. от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические полукольца шириной 3,0 см. и металлические кнопки диаметром 1,0-1,2 см.

Нитки должны использоваться в тональном сочетании с цветом основной и отделочной ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

Рост: 164-170.



Рисунок В47–Халат медицинский женский модель 168

Таблица В47.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 168

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	1	0
4	Бочок спинки	2	1
5	Кокетка правой полочки	1	0
6	Кокетка левой полочки	1	0
7	Кокетка спинки	1	0
8	Рукав	2	1
9	Мешковина кармана (верхняя)	2	1
10	Правый полупояс	1	0
11	Левый полупояс	1	0
12	Подборт	2	1
13	Обтачка горловины спинки	1	0
Отделочная ткань			
14	Декоративная планка правой полочки	1	0
15	Мешковина кармана (нижняя)	2	1
Прокладочный материал			
16	Декоративная планка правой полочки (клеевая)	1	0
ИТОГО		23	7

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA⁴ по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 187 из 529

Таблица В47.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 168

№	Наименование измерения	Рост	Размер						Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	88.8	88.5	88.8	88.5	88.5	88.6	(+/-)1
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	37.2	38	38.8	39.9	41	42.1	(+/-)0.5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	85.8	86.2	86.5	87.1	87.6	88.4	(+/-)1
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	45	47	49	51	53	55	(+/-)1
5	Ширина изделия внизу (с учетом ширины полужаноса застежки)	164-170	50	52	54	56	58	60	(+/-)1
6	Длина рукава, см	164-170	45.6	45.7	45.8	45.9	46	46.1	(+/-)1
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	17.7	18.3	18.9	19.5	20.2	20.9	(+/-)0.5
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	13	13.4	13.8	14.2	14.5	14.8	(+/-)0.5
9	Длина кармана по линии входа, см	164-170	14	14	14.2	14.2	14.5	14.5	(+/-)0.3

Продолжение Таблицы В47.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер						Допуск, см
			52	54	56	58	60	62	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	88.8	88.7	88.8	88.6	88	88.5	(+/-)1
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	43.3	44.5	45.7	47	48.2	49.4	(+/-)0.5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	89.3	89.7	90.1	90.7	91	92.4	(+/-)1
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	57	59	61	63	65	67	(+/-)1
5	Ширина изделия внизу (с учетом ширины полужаноса застежки)	164-170	62	64	66	68	70	72	(+/-)1
6	Длина рукава, см	164-170	46.2	46.3	46.4	46.5	46	46.7	(+/-)1
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	21.6	22.2	22.8	23.5	24.2	25	(+/-)0.5
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	15.1	15.5	15.8	16.2	16.6	17	(+/-)0.5
9	Длина кармана по линии входа, см	164-170	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8	15.5	(+/-)0.3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 188 из 529

В48. Халат медицинский женский модель 169.

Описание модели

Халат медицинский женский из белой или гладкокрашеной ткани длиной выше колена, полуприлегающего силуэта, с небольшим расширением к низу ($=3,0$ см); без воротника, с V-образным вырезом горловины, обработанным обтачкой; с декоративными патами шириной 3,4-3,6 см, одним концом вшитыми в проймы, а другим концом треугольной формы пристегивающимися к плечевым швам с помощью кнопок.

Перед с центральной бортовой застежкой на 2 ряда кнопок, по 5 в ряду, с расстоянием 12,0 см между рядами; с отрезными отложными лацканами до линии груди; с рельефными швами, выходящими из верхних частей пройм и доходящими до низа; с двумя боковыми карманами. Входы в карманы наклонные и обработаны планками шириной 3,5-3,7 см.

Спинка со средним швом, заканчивающимся шлицей, с рельефными швами, выходящими из верхних частей пройм и доходящими до низа; с фигурным хлястиком шириной 3,4-3,6 см на линии талии, пристегивающимся на кнопки.

Рукава втачные, одношовные, длиной 5/6, с декоративными патами шириной 3,4-3,6 см, проходящими по низу над подгибкой, вшитыми одним концом в швы рукавов, а другим концом треугольной формы пристегивающимися к рукавам на кнопки; со шлевками, фиксирующими паты.

По рельефам, лацканам, горловине, краям бортов, шлевок, пат, хлястика, швам настрачивания карманов и планок кармановдолжны быть проложены строчки на 0,1-0,2 с от края или шва.

По низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,8-3,0 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 10-12 мм.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.



Рисунок В48 –Халат медицинский женский модель 169

Таблица В48.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 169

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	2	1
4	Бочок спинки	2	1
5	Лацкан	4	2
6	Рукав	2	1
7	Карман	2	1
8	Планка кармана	2	1
9	Пата рукава	4	2
10	Подборт	2	1
11	Погон	4	2
12	Хлястик спинки	2	1
13	Шлевки	1	0
	ИТОГО	31	15

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 190 из 529

Таблица В48.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 169

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	87.2	87.5	87.7	88.0	88.2	88.5	88.8	89.1	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	34.5	35.5	36.5	37.3	38.2	39.1	39.8	40.7	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	90.8	91.3	91.8	92.3	92.8	93.4	94.0	94.6	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	45.5	47.5	49.5	51.5	53.5	55.5	57.5	59.5	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	54.5	56.4	58.3	60.2	62.1	64.0	65.9	67.8	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	48.2	48.4	48.6	48.8	49.1	48.4	49.7	50.0	(+/-0.5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	17.1	17.8	18.4	19.1	19.8	20.5	21.2	22.1	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	13.6	14.0	14.4	14.9	15.3	15.8	16.4	17.0	(+/-0.5)
9	Ширина кармана по линии входа, см	164-170	13.8	14.4	15.1	15.8	16.5	17.4	18.1	18.8	(+/-0.3)
10	Глубина кармана по переднему краю, см	164-170	19.7	19.7	19.7	20.0	20.0	20.2	20.2	20.4	(+/-0.3)

Продолжение Таблицы В42.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	89.4	89.8	90.2	90.6	91.0	91.4	91.8	92.2	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	41.3	42.0	42.7	43.3	43.9	44.5	45.1	45.7	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	95.3	96.1	97.0	97.7	98.4	99.1	99.8	100.5	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	61.5	63.5	65.5	67.5	69.5	71.5	73.5	75.5	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	69.7	71.6	73.5	75.4	77.3	79.2	81.1	83.0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	50.2	50.4	50.6	50.8	51.0	51.2	51.4	51.6	(+/-0.5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	23.0	23.8	24.6	25.4	26.2	27.0	27.7	28.4	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	17.5	18.1	18.7	19.3	19.9	20.5	21.1	21.7	(+/-0.5)
9	Ширина кармана по линии входа, см	164-170	19.8	20.7	21.7	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	(+/-0.3)
10	Глубина кармана по переднему краю, см	164-170	20.6	20.6	20.7	20.7	20.7	20.8	20.9	21.0	(+/-0.3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 191 из 529

В49. Халат медицинский женский модель 170.

Описание модели

Халат медицинский женский из белой или гладкокрашеной ткани длиной выше колен, полуприлегающего силуэта, слегка расширенный к низу. Изделие без воротник с V-образным вырезом горловины.

Перед состоит из двух запахивающихся полочек с расходящимися к низу бортами. Правый борт длиннее левого на 6-7 см. На каждой полочке должен быть обработан один рельефный шов, выходящий из проймы и доходящий до низа и один накладной карман с наклонным входом, боковые срезы которого входят в рельефный и боковой швы. Центральные части полочек двойные. В угол борта правой полочки чуть выше уровня талии должен быть вшит отрезок тесьмы, образующий петлю длиной 1,0-1,2 см с продетым в нее металлическим полукольцом. На рельеф левой полочки, на том же уровне, должна быть настрочена тесьма, образуя 2 завязки длиной 34-36 см оформленные металлическими наконечниками. На правой полочке обработан треугольный лацкан, вшитый в край борта и плечевой шов. По отлетному краю лацкана должен быть проложен кант с наполнителем шириной 0,3-0,4 см.

Спинка со средним швом, заканчивающимся шлицей; с двумя рельефными швами, выходящими из пройм и доходящими до низа; с хлястиком шириной 2,9-3,1 см, состоящим из двух частей, вшитых одним концом в рельефные швы на уровне талии и скрепленных посередине спинки с помощью двух металлических полуколец.

Рукава неполные, короткие, вшитые в верхние части пройм. Нижние части пройм должны быть обработаны косыми бейками.

По краям бортов, хлястиков, рельефам, горловине спинки, верхним краям карманов и швам их настрачивания должны быть проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу рукавов и нижней части пройм должна быть проложена строчка на расстоянии 0,9-1,1 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические полукольца шириной 2,0-3,0 см и металлические наконечники шириной 2,5 см.

Для наружных завязок должна использоваться декоративная тесьма шириной 2,5-3,0 см контрастного цвета.

Для отделки лацкана должен использоваться кант в тональном сочетании с цветом тесьмы.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58;

Рост: 164-170.

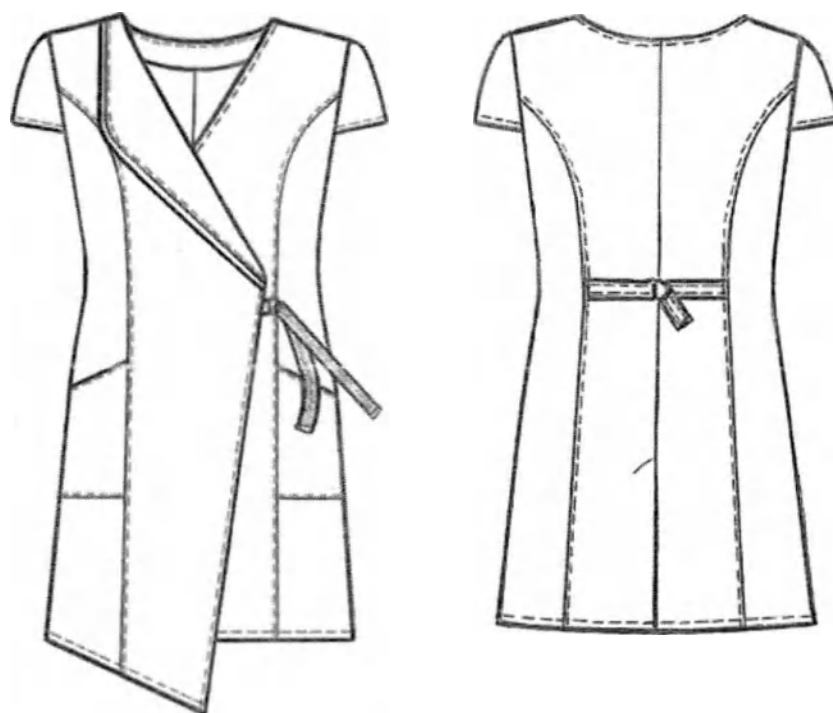


Рисунок В49–Халат медицинский женский модель 170

Таблица В49.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 170

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Правая полочка	2	1
2	Левая полочка	2	1
3	Бочок полочки	2	1
4	Спинка	2	1
5	Бочок спинки	2	1
6	Рукав	2	1
7	Лацкан	2	1
8	Карман	2	1
9	Правая часть хлястика	1	0
10	Левая часть хлястика	1	0
11	Внутренняя завязка	2	1
12	Обтачка кармана	2	1
13	Обтачка горловины спинки	1	0
14	Окантовка проймы	2	1
	Прокладочный материал		
15	Клеевая полоска на горловину (шириной 1 см)	1	1
	ИТОГО	26	12

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 193 из 529

Таблица В49.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Халат медицинский женский модель 170

№	Наименование измерения	Рост	Размер					Допуск, см
			40	42	44	46	48	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	83,8	84,0	84,1	84,3	84,5	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа (по левой стороне), см	164-170	86,3	86,8	87,4	87,9	88,4	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	43,0	45,0	47,0	49,0	51,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	6,1	6,3	6,5	6,6	6,7	(+/-0,5)
7	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	13,0	13,7	14,3	15,1	15,8	(+/-0,3)
8	Глубина нижнего кармана, см	164-170	20,3	20,4	20,5	20,6	20,7	(+/-0,3)

Продолжение Таблицы В49.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер					Допуск, см
			50	52	54	56	58	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	84,8	85,1	85,6	86,2	86,8	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа (по левой стороне), см	164-170	89,0	89,6	90,4	91,0	91,6	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	6,8	6,9	7,1	7,3	7,4	(+/-0,5)
7	Ширина кармана посередине, см	164-170	16,5	17,2	18,1	19,0	19,8	(+/-0,3)
8	Глубина кармана по переднему краю, см	164-170	20,7	20,7	21,2	21,3	21,4	(+/-0,3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 194 из 529

В50. Халат медицинский женский модель 171.

Описание модели

Халат медицинский женский из белой ткани, длиной выше колена, трапецевидного силуэта, с карманами в боковых швах.

Перед с центральной бортовой застежкой на кнопки, переходящей в узкий V-образный вырез горловины; с рельефными швами, выходящими из пройм и доходящими до низа; с одним верхним закругленным накладным карманом. Верхняя подгибка кармана шириной 2,5 см должна быть застрочена на лицевую сторону и под нее посередине вшита декоративная деталь на шлевке. Бочки полочек отрезные ниже линии груди, нижние части бочков заложены в мелкие складки и настрочены накладным швом на верхние части на расстоянии 1,5 см от края, обработанного частой обметочной строчкой.

Спинка с рельефными швами, выходящими из пройм и доходящими до низа. Средняя часть спинки разрезная ниже линии груди. Нижняя часть спинки заложена в мелкие складки и настрочена накладным швом на верхнюю часть на расстоянии 1,5 см от края, обработанного частой обметочной строчкой.

Рукава втачные, одношовные, длиной 3/4, с широкими манжетами по низу.

Воротник -стойка шириной 3,4-3,6 см.

По краю бортов горловины, воротника, швам притачивания манжет и настрачивания кармана должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По краям входов в боковые карманы должны быть установлены закрепки на спецмашине.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,1-1,3 см и декоративная металлическая деталь в виде сердечка для кармана.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки белого цвета.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.



Рисунок В50–Халат медицинский женский модель 171

Таблица В50.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 171

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Верхняя часть бочка полочки	2	1
3	Нижняя часть бочка полочки	2	1
4	Верхняя центральная часть спинки	1	0
5	Нижняя центральная часть спинки	1	0
6	Бочок спинки	2	2
7	Рукав	2	2
8	Манжета	2	2
9	Верхний карман	1	0
10	Мешковина нижнего кармана	4	2
11	Воротник	2	1
12	Подборт	2	1
	ИТОГО	23	13

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоцелевого использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 196 из 529

Таблица В50.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Халат медицинский женский модель 171

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	90,3	90,6	90,9	91,3	91,6	92,0	92,3	92,6	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	36,8	37,6	38,4	39,1	39,9	40,8	41,6	42,3	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	93,0	93,5	94,0	94,5	95,0	95,5	96,0	96,5	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	98,2	102,0	105,8	109,6	113,4	117,2	121	124,8	(+/-2)
6	Длина рукава, см	164-170	49,0	49,2	49,4	49,6	49,8	50,0	50,1	50,3	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	16,7	17,4	18,0	18,8	19,4	20,1	20,8	21,6	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	14,5	14,9	15,3	15,7	16,1	16,6	17,0	17,4	(+/-0,5)
9	Ширина верхнего кармана, см	164-170	7,6	8,1	8,0	9,0	9,0	9,8	9,8	9,8	(+/-0,3)
10	Длина входа нижнего кармана, см	164-170	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	(+/-0,3)
11	Длина воротника по отлету, см	164-170	34,3	35,2	36,1	37,0	37,9	38,8	39,7	40,6	(+/-0,5)

Продолжение Таблицы В50.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	92,8	93,0	93,3	93,6	93,8	94,0	94,3	94,6	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	43,0	43,7	44,4	45,1	45,8	46,5	47,2	47,8	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	97,0	97,5	98,0	98,5	99,0	99,5	100,0	100,5	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	128,6	132,4	136,2	140,0	143,8	147,6	151,4	155,2	(+/-2)
6	Длина рукава, см	164-170	50,5	50,6	50,8	51,0	51,2	51,4	51,6	51,8	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	22,5	23,4	24,2	25,0	25,8	26,6	27,3	28,0	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	17,8	18,2	18,6	19,0	19,4	19,8	20,2	20,6	(+/-0,5)
9	Ширина верхнего кармана, см	164-170	10,5	10,5	10,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	(+/-0,3)
10	Длина входа нижнего кармана, см	164-170	14,5	14,5	14,5	14,5	15,0	15,0	15,0	15,5	(+/-0,3)
11	Длина воротника по отлету, см	164-170	41,5	42,4	43,3	44,2	45,1	46,0	46,9	47,8	(+/-0,5)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 197 из 529

B51. Халат медицинский женский модель 172.

Описание модели

Халат медицинский женский полуприлегающего силуэта, длиной до колена, со съёмным завязывающимся поясом шириной 4,1-4,3 см.

Перед со смещенной на 10,0 см бортовой застежкой на потайные кнопки, с притачной по краям бортов отделочной полосой шириной 4,0-4,2 см; с рельефными швами, выходящими из верхней части проймы и доходящими до низа; с двумя боковыми накладными карманами с наклонными входами; с притачанными к низу отделочными полосами шириной 4,0-4,2 см.

Спинка со средним швом, заканчивающимся шлицей; с притачанной к низу отделочной полосой шириной 4,0-4,2 см.

Рукава втачные, одношовные, длиной 3/4.

Воротник-аппаш с цельновыкроенной стойкой.

Отделочные полосы переда и спинки должны быть выполнены из ткани контрастного цвета.

По краям воротника и отделочных полос должна быть проложена отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края.

По низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,8-3,0 см от подогнутого края.

По линиям входов в карманы должна быть проложена строчка на расстоянии 3,3-3,5 см.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,1-1,3 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом основной и отделочной тканей.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.



Рисунок В51–Халат медицинский женский модель 172

Таблица В51.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 172

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	2	1
4	Рукав	2	1
5	Карман	2	1
6	Пояс	2	1
7	Подборт	2	1
8	Обтачка кармана	2	1
9	Обтачка горловины спинки	1	0
	Отделочная ткань		
10	Отделочная полоса борта	4	2
11	Отделка низа левой спинки	1	0
12	Отделка низа правой спинки	1	0
13	Отделка низа полочки	2	1
	Прокладочный материал		
14	Отделочная полоса борта	2	1
	Итого:	27	12

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Таблица В51.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 172

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	98.0	98.5	99.0	99.5	100.0	100.5	101.0	101.5	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	35.6	36.6	37.6	38.6	39.6	40.6	41.5	42.4	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	98.8	99.8	100.8	101.8	102.7	103.4	104.4	105.2	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	48.0	50.0	52.1	54.2	56.3	58.4	60.5	62.6	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	55.2	57.0	58.9	60.7	62.5	64.3	66.1	68.0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	43.4	43.6	43.8	44.0	44.2	44.4	44.5	44.7	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	17.3	18.0	18.7	19.3	19.8	20.4	21.2	22.0	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	15.5	15.8	16.1	16.4	16.7	17.0	17.3	17.6	(+/-0,5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	13.9	14.5	15.3	16.0	16.8	17.5	18.3	19.3	(+/-0,3)
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	164-170	20.5	20.7	20.8	20.9	20.9	21.0	21.2	21.2	(+/-0,3)
11	Длина пояса, см	164-170	133	141	149	155	161	167	173	179	(+/-1)

Продолжение Таблицы В51.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	102.0	102.5	103.0	103.5	104.0	104.5	105.0	105.5	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	43.3	44.2	45.1	46.0	46.9	47.8	48.7	49.6	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	106.0	106.8	107.6	108.4	109.2	110.0	110.8	111.6	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	64.7	66.8	68.9	71.0	73.0	75.0	77.0	79.0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	70.0	72.0	74.0	76.0	77.9	79.8	81.7	83.6	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	44.8	45.0	45.2	45.4	45.6	45.8	46.0	46.2	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	22.7	23.4	24.1	24.8	25.5	26.2	26.9	27.6	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	18.0	18.4	18.8	19.2	19.6	20.0	20.4	20.8	(+/-0,5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	20.3	21.1	22.0	22.8	23.5	24.3	25.1	25.9	(+/-0,3)
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	164-170	21.3	21.3	21.4	21.4	21.5	21.5	21.6	21.6	(+/-0,3)
11	Длина пояса, см	164-170	185	191	197	202	206	210	214	218	(+/-1)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 200 из 529

B52. Халат медицинский женский модель 175.

Описание модели

Халат медицинский женский из белой ткани длиной до колен; полуприлегающего силуэта; без воротника, с неглубоким V-образным вырезом горловины, обработанным обтачкой.

Перед с центральной бортовой застежкой на потайные кнопки до линии груди, выше линии груди борт правой полочки с треугольным запахивающимся выступом, фиксирующимся с помощью потайной кнопки; с фигурными швами, выходящими из пройм и доходящими до низа; с двумя боковыми карманами с наклонными входами в подрезах на боковых частях полочек. Входы в карманы обработаны притачными планками шириной 3,0-3,2 см. На выступе правой полочки закреплен металлический логотип с фирменной символикой на репсовой ленте белого цвета.

Спинка со средним швом, заканчивающимся шлицей и фигурными рельефными швами, выходящими из пройм и доходящими до низа.

Рукава втачные, одношовные, длиной 3/4.

По рельефам, горловине спинки и швам притачивания планок карманов проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу рукавов, краям бортов и горловине должна быть проложена строчка на расстоянии 3,8-4,1 см от края.

По низу изделия проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от подогнутого края.

В качестве фурнитуры используются металлические кнопки диаметром 1,0-1,2 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки белого цвета.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.

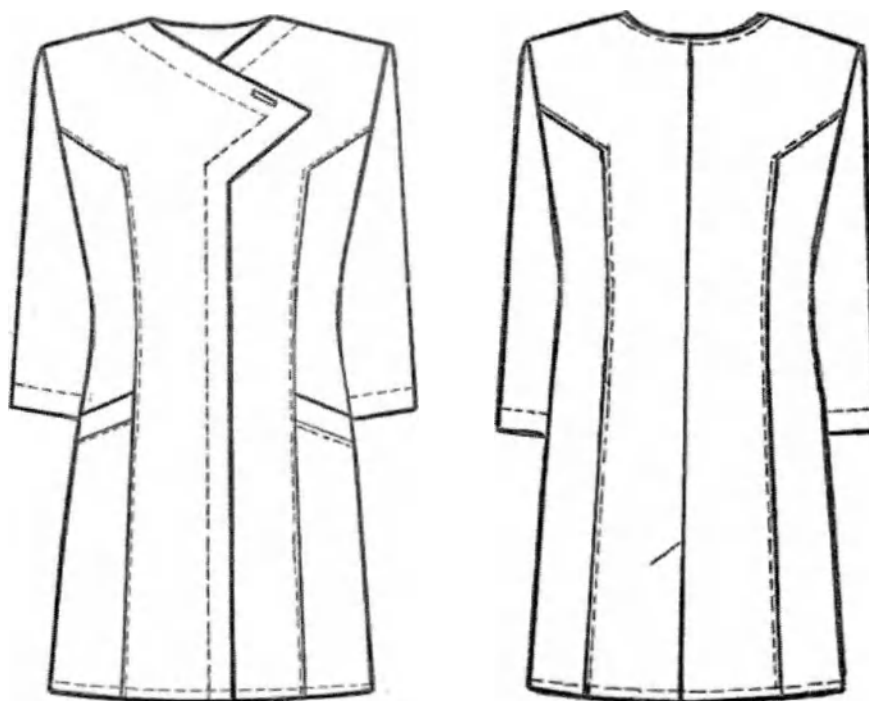


Рисунок В52–Халат медицинский женский модель 175

Таблица В52.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 175

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Левая полочка	1	0
2	Правая полочка	1	0
3	Верхняя часть бочка полочки	2	1
4	Нижняя часть бочка полочки	2	1
5	Спинка	2	1
6	Бочок спинки	2	1
7	Мешковина кармана	2	1
8	Планка кармана	2	1
9	Рукав	2	1
10	Подборт	2	1
11	Обтачка горловины спинки	1	0
	Прокладочный материал (клеевая)		
12	Подборт	2	1
13	Обтачка горловины спинки	1	0
	ИТОГО	22	9

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Таблица В52.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 175

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	96.2	96.5	96.7	96.8	97.2	97.5	97.8	98.1	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	34.5	35.5	36.5	37.3	38.2	39.1	39.8	40.7	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	99.1	99.8	100.5	101.2	101.8	102.5	103.3	104.0	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	44.8	46.9	49.0	51.1	53.2	55.3	57.4	59.5	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	55.0	57.0	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	46.7	46.9	47.2	47.5	47.7	47.9	48.2	48.5	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	17.1	17.8	18.4	19.1	19.8	20.5	21.2	22.1	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	13.6	14.0	14.4	14.8	15.3	15.8	16.4	17.0	(+/-0.5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	14.8	15.6	16.4	17.2	18.0	18.8	19.4	20.2	(+/-0.3)

Продолжение Таблицы В52.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	98.4	98.8	99.2	99.5	99.8	100.1	100.4	100.7	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	41.5	42.1	42.7	43.4	44.1	44.8	45.5	46.2	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	104.7	105.5	106.2	107.0	107.7	108.4	109.0	109.7	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	61.6	63.6	65.6	67.6	69.6	71.6	73.6	75.6	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	71.0	73.0	75.0	77.0	79.0	81.0	83.0	85.0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	48.7	49.0	49.2	49.4	49.6	49.8	50.0	50.2	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	23.0	23.8	24.6	25.4	26.1	26.9	27.6	28.3	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	17.5	18.1	18.7	19.3	19.9	20.5	21.1	21.7	(+/-0.5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	21.0	21.7	22.5	23.2	24.0	24.8	25.6	26.4	(+/-0.3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В53. Халат медицинский женский модель 176.

Описание модели

Халат медицинский женский из белой ткани, длиной до колен, полуприлегающего силуэта; с карманами в боковых швах; со шлицей в правом боковом шве; без воротника, с овальным вырезом горловины, обработанным обтачкой.

Перед с центральной бортовой супатной застежкой на 8 обметанных петель и 8 пуговиц; с двумя косыми нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов; с двумя горизонтальными подрезами на левой полочке-один выше линии груди, второй-чуть выше линии талии.

В верхний подрез должен быть вшит декоративный прямоугольный клапан. Посередине клапана может быть закреплен металлический логотип с фирменной символикой. Борта обработаны притачными планками шириной 3,5-3,7 см. Правая полочка удлинена к боковому шву на 3,0 см.

Спинка с отрезной кокеткой выше уровня лопаток и средним швом.

Рукава втачные, длиной $\frac{3}{4}$, с косым подрезом, выходящим из задней части оката и заканчивающимся внизу спереди. В подрезе обработана шлица, передняя часть рукава в области шлицы удлинена относительно задней части на 1,5 см. На задней части рукава горизонтальный подрез на расстоянии 14,5 см от низа.

Часть левой полочки между подрезами, задние нижние части рукавов и внутренняя часть шлицы бокового шва должны быть выполнены из отделочной ткани.

На верхней планке застежки между петлями и на шлицах рукавов должны быть выполнены закрепки на спецмашине нитками в тональном сочетании с цветом отделочной ткани.

По краям входов в боковые карманы должны быть выполнены закрепки на спецмашине нитками белого цвета.

По швам притачивания планок застежки, по кокетке, среднему шву спинки, подрезам левой полочки и рукавов (до шлицы), а также по краям клапана должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу изделия и низу задних частей рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,8-3,0 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться прозрачные пуговицы диаметром 1,5-1,7 см.

Нитки должны использоваться в тональном сочетании с цветом основной и отделочной тканей.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2



Рисунок В53–Халат медицинский женский модель 176

Таблица В53 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 176

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет. кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Правая полочка	1	0
2	Кокетка левой полочки	1	0
3	Нижняя часть левой полочки	1	0
4	Спинка	2	1
5	Кокетка спинки	1	0
6	Правая планка застежки	1	0
7	Левая планка застежки	1	0
8	Клапан	1	0
9	Рукав	2	1
10	Верхняя задняя часть рукава	2	1
11	Мешковина кармана	4	2
12	Обтачка горловины полочки	2	1
13	Обтачка горловины спинки	1	0
	Отделочная ткань		
14	Средняя часть левой полочки	1	0
15	Нижняя задняя часть рукава	2	1
16	Планка под шлицу	1	0

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Прокладочный материал		
17	Правая планка застежки	1	0
18	Левая планка застежки	1	0
19	Шлица правой полочки	1	0
20	Клапан	1	0
21	Шлица рукава	2	1
22	Обтачка горловины полочки	2	1
23	Обтачка горловины спинки	1	0
	Итого:	33	9

Таблица В53.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 176

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	94,8	94,9	95,1	95,3	95,4	95,7	96,0	96,3	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	34,9	35,7	36,5	37,3	38,1	38,9	39,9	40,7	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	97,6	98,1	98,6	99,1	99,7	100,3	100,9	101,4	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	45,0	45,1	45,2	45,3	45,4	45,6	45,8	46,0	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	15,4	16,0	16,7	17,4	18,1	18,8	19,5	20,4	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	14,0	14,5	14,9	15,4	15,8	16,2	16,6	17,1	(+/-0,5)
9	Длина входа в карман, см	164-170	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	15,0	15,0	15,5	(+/-0,5)

Продолжение Таблицы В53.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	96,4	96,6	97,0	97,5	98,0	98,5	99,0	99,5	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	41,5	42,1	42,7	43,3	44,1	44,9	45,9	46,9	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	102,1	103,0	104,1	105,3	106,8	108,0	109,0	110,0	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	46,1	46,2	46,4	46,6	46,8	47,0	47,2	47,4	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	21,2	22,0	22,8	23,6	24,3	25,0	25,8	26,6	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	17,6	18,2	18,7	19,2	19,7	20,1	20,7	21,2	(+/-0,5)
9	Длина входа в карман, см	164-170	15,5	15,5	16,0	16,0	16,0	16,5	16,5	16,5	(+/-0,5)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

B54. Халат медицинский женский модель 177.

Описание модели

Халат медицинский женский из белой ткани длиной до колен, полуприлегающего силуэта, без воротника, с фигурным вырезом горловины, обработанным обтачкой.

Перед со смещенной застежкой на тесьму-«молнию»; с отрезной нижней частью; с рельефными швами, выходящими из пройм и доходящими до шва притачивания нижней части; с двумя боковыми карманами, обработанными в наклонных подрезах на бочках переда. К левому борту под тесьму-«молнию» должна быть притачана планка шириной 3,4-3,6 см.

Спинка с отрезной нижней частью; со средним швом, с рельефными швами, выходящими из пройм и заканчивающимися в шве притачивания нижней части; с декоративным хлястиком шириной 3,6-3,8 см, состоящим из двух частей, вшитых одним концом в рельефы на уровне линии талии и скрепленными посередине спинки с помощью двух кнопок.

Рукава втачные, одношовные, длиной 3/4. Низ рукавов должен быть оформлен притачными отложными манжетами шириной 3,6-3,8 см.

Манжеты, левый хлястик, правый подборт и планка под «молнию», должны быть выполнены из отделочной приитованной ткани.

По рельефам, среднему шву спинки, краям подрезов, бортов, горловины, хлястика и швам притачивания нижних частей переда и спинки должны быть проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должна быть использована тесьма-«молния» длиной 70 см и металлические кнопки диаметром 0,9-1,1 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки белого цвета.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.

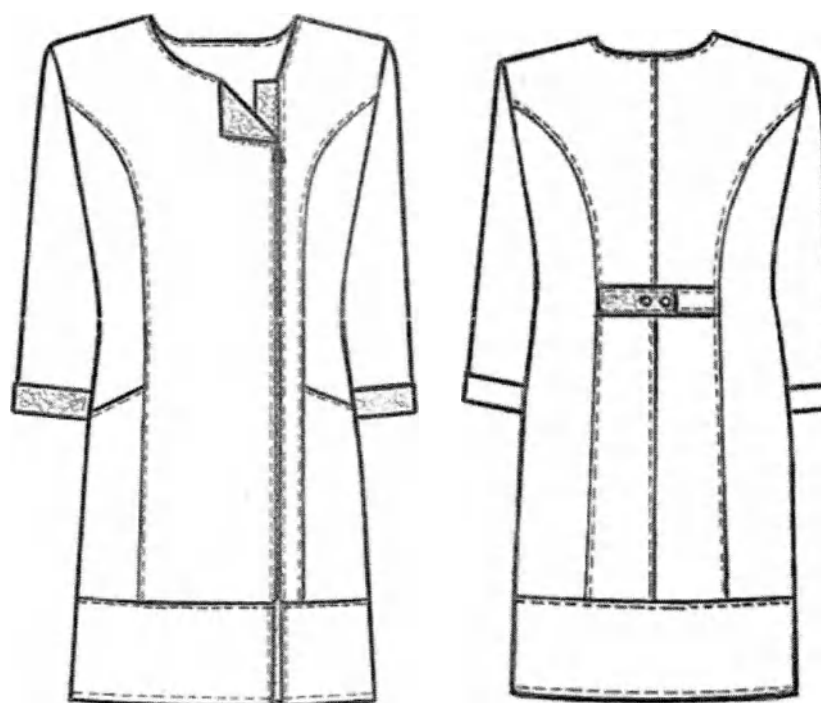


Рисунок В54–Халат медицинский женский модель 177

Таблица В54.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 177

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Левая полочка	1	0
2	Правая полочка	1	0
3	Бочок полочки	2	1
4	Спинка	2	1
5	Бочок спинки	2	1
6	Нижняя часть правой полочки	1	0
7	Нижняя часть левой полочки	1	0
8	Нижняя часть спинки	1	0
9	Нижняя часть бочка полочки + мешковина	4	2
10	Рукав	2	1
11	Подборт левой полочки	1	0
12	Обтачка горловины спинки	1	0
13	Правый хлястик	1	0
	Отделочная ткань		
14	Планка застежки	1	0
15	Подборт правой полочки	1	0
16	Манжет рукава	2	1
17	Левый хлястик	1	0
	Прокладочный материал (клеевая)		
18	Подборт правой полочки	1	0
19	Подборт левой полочки	1	0
20	Обтачка горловины спинки	1	0
	ИТОГО	28	7

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-
2023, ред.2

Таблица В54.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 177

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	94,2	94,5	94,7	94,9	95,0	95,2	95,4	95,6	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	34,5	35,4	36,3	37,2	38,1	39,0	39,7	40,6	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	96,8	97,3	97,8	98,3	98,8	99,4	100,0	100,6	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	55,0	56,9	58,8	60,7	62,6	64,5	66,4	68,3	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	44,7	44,9	45,1	45,3	45,6	45,9	46,2	46,5	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	16,8	17,5	18,1	18,7	19,4	20,1	20,8	21,7	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	13,7	14,1	14,5	15,0	15,4	15,9	16,5	17,1	(+/-0,5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	13,8	14,4	15,1	15,8	16,5	17,2	18,0	18,8	(+/-0,3)
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	164-170	28,7	28,6	28,5	28,4	28,3	28,2	28,1	28,0	(+/-0,3)

Продолжение Таблицы В54.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	95,8	96,0	96,1	96,2	96,3	96,4	96,5	96,6	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	41,2	41,9	42,6	43,2	43,8	44,4	45,0	45,6	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	101,3	102,0	102,5	103,0	103,5	104,0	104,5	105,0	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	70,2	72,1	74,0	75,9	77,8	79,7	81,6	83,5	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	46,7	46,9	47,1	47,3	47,5	47,7	47,9	48,1	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	22,6	23,4	24,2	25,0	25,8	26,6	27,3	28,0	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	17,6	18,2	18,8	19,4	20,0	20,6	21,2	21,8	(+/-0,5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	19,7	20,6	21,6	22,5	23,3	24,1	24,9	25,7	(+/-0,3)
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	164-170	27,9	27,8	27,7	27,6	27,5	27,4	27,3	27,9	(+/-0,3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 209 из 529

B55. Халат медицинский женский модель 178.

Описание моделей

Халат медицинский женский из белой или гладкокрашеной ткани длиной ниже колена, полуприлегающего силуэта; без воротника, с фигурным вырезом горловины, обработанным обтачкой.

Перед с центральной застежкой встык на разъемную тесьму-«молнию»; с отрезными кокетками; с двумя расходящимися к низу рельефными швами, в которых обработаны боковые карманы. В углах карманов должны быть установлены закрепки на спецмашине. Нижние части бочков переда отрезные и выполнены в виде воланов.

Спинка с отрезной кокеткой, вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с декоративным хлястиком шириной 3,6-3,8 см, состоящим из двух частей, вшитых одним концом в рельефные швы на уровне линии талии и скрепленных посередине спинки с помощью пуговицы. Нижние части бочков спинки отрезные и выполнены в виде воланов.

Рукава втачные, одношовные, длиной 3/4.

По краям горловины, бортов, хлястиков, низу изделия, кокеткам, рельефам и подрезам должны быть проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,7-2,9 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться белая разъемная тесьма-«молния» и белая пластмассовая пуговица диаметром 1,7-1,9 см.

Нитки должны использоваться в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.



Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 210 из 529

Рисунок В55–Халат медицинский женский модель 178

Таблица В55.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 178

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Кокетка полочки	2	1
4	Волан полочки	2	1
5	Спинка	1	0
6	Бочок спинки	2	1
7	Кокетка спинки	1	0
8	Волан спинки	2	1
9	Рукав	2	1
10	Хлястик	4	2
11	Мешковина кармана	4	2
12	Обтачка горловины спинки	1	0
13	Подборт	2	1
	ИТОГО	27	12

Таблица В55.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 178

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	99,5	100,0	100,5	101,0	101,5	101,9	102,2	102,5	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,4	40,2	41,0	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	99,8	100,5	101,3	101,9	102,7	103,6	104,4	105,2	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	43,6	45,6	47,6	49,6	51,6	53,6	55,6	57,6	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	73,6	75,6	77,5	79,4	81,3	83,2	85,1	87,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	44,0	44,2	44,5	44,7	44,9	45,1	45,3	45,5	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	17,3	18,0	18,5	19,1	19,6	20,2	20,8	21,3	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	14,2	14,6	15,0	15,4	15,8	16,2	16,6	17,0	(+/-0,5)
9	Длина входа в карман, см	164-170	14,0	14,0	14,0	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0	(+/-0,3)

Продолжение Таблицы В55.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	102,8	103,0	103,2	103,4	103,6	103,8	104,0	104,2	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	41,8	42,7	43,6	44,5	45,4	46,3	47,2	48,1	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	59,6	61,6	64,0	66,3	68,4	70,5	72,6	74,7	(+/-1)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	59.6	61.6	64.0	66.3	68.4	70.5	72.6	74.7	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	89.0	91.0	93.4	95.7	97.7	99.8	101.8	103.0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	45.7	46.0	46.3	46.6	46.8	47.0	47.2	47.4	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	22.0	22.7	23.3	24.1	24.8	25.5	26.2	27.0	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	17.5	17.9	18.3	18.7	19.2	19.6	20.0	20.5	(+/-0,5)
9	Длина входа в карман, см	164-170	15.0	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	16.0	16.0	(+/-0,3)

B56. Халат медицинский женский модель 1173.

Описание модели

Халат медицинский женский из белой ткани полуприлегающего силуэта, длиной выше колена; отрезной по линии талии; со смещенными вперед на 3,0 см плечевыми швами; без воротника, с зауженной V-образной горловиной, обработанной сзади притачной планкой шириной 3,9-4,1 см, а спереди подбортами; с разрезами в плечевых швах до шва притачивания планки; с разрезами в боковых швах.

Перед с центральной бортовой застежкой на 8 кнопок; с рельефными швами, выходящими из пройм и доходящими до низа; с боковыми карманами, обработанными в наклонных подрезах на боковых частях полочек. Верхние края карманов должны быть обработаны притачными планками шириной 3,4-3,6 см. В швах притачивания нижних боковых частей полочек должна быть заложена сборка.

Спинка с рельефными швами, выходящими из пройм и доходящими до низа.

Рукава втачные, одношовные, длинные.

По рельефам, швам притачивания нижней части изделия, планок горловины и карманов, краям бортов, разрезов, горловине и плечевым швам должны быть проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 3,3-3,5 см от подогнутого края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 10-12 мм.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки белого цвета.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA¹ по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

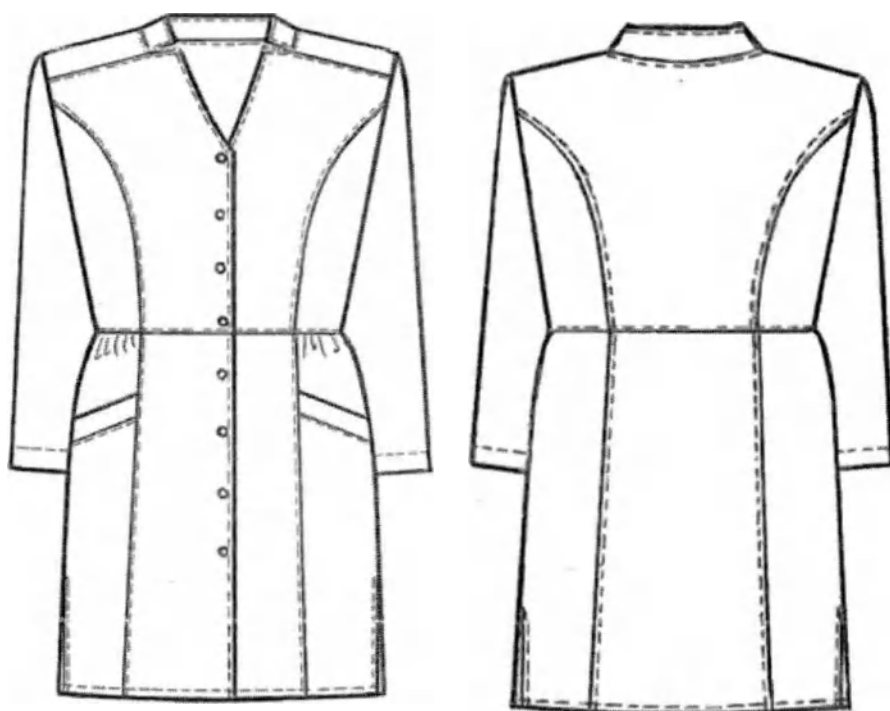


Рисунок В56–Халат медицинский женский модель 1173

Таблица В56.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 1173

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Верхняя часть полочки	2	1
2	Верхняя часть бочка полочки	2	1
3	Верхняя часть спинки	1	0
4	Верхняя часть бочка спинки	2	1
5	Средняя часть бочка полочки	2	1
6	Нижняя часть бочка полочки	2	1
7	Нижняя часть полочки	2	1
8	Нижняя часть спинки	1	0
9	Нижняя часть бочка спинки	2	1
10	Мешковина кармана	2	1
11	Планка кармана	2	1
12	Рукав	2	1
13	Планка горловины	2	1
14	Обтачка горловины спинки	1	0
15	Подборт	2	1
	ИТОГО	27	12

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 213 из 529

Таблица В56.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 1173

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	85,4	85,7	85,9	86,2	86,4	86,7	87,0	87,3	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	34,7	35,7	36,7	37,5	38,4	39,3	40,0	40,9	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	90,5	91,0	91,5	92,0	92,5	93,1	93,7	94,3	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	57,0	57,2	57,4	57,6	57,8	58,0	58,2	58,4	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	17,1	17,8	18,4	19,1	19,8	20,5	21,2	22,1	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	12,3	12,5	12,8	13,1	13,3	13,5	13,7	13,9	(+/-0,5)
9	Ширина кармана по линии входа, см	164-170	17,3	17,9	18,6	19,4	20,1	20,9	21,6	22,5	(+/-0,3)
10	Глубина кармана по переднему краю, см	164-170	19,5	20,0	20,0	20,0	20,5	20,5	21,0	21,5	(+/-0,3)
11	Длина воротника по отлету, см	164-170	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	(+/-0,5)

Продолжение Таблицы В56.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	87,6	88,0	88,4	88,8	89,2	89,6	90,0	90,4	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	41,7	42,3	42,9	43,5	44,1	44,7	45,3	45,9	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	95,0	95,8	96,7	97,4	98,1	98,8	99,5	100,2	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	84,0	86,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	58,6	58,8	59,0	59,2	59,4	59,6	59,8	60,0	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	23,0	23,8	24,6	25,4	26,2	27,0	27,7	28,4	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	14,1	14,3	14,6	14,9	15,2	15,5	15,9	15,9	(+/-0,5)
9	Ширина кармана по линии входа, см	164-170	23,3	24,2	25,2	26,0	26,8	27,6	28,4	29,2	(+/-0,3)
10	Глубина кармана по переднему краю, см	164-170	21,5	21,5	22,0	22,0	22,0	22,5	22,5	22,5	(+/-0,3)
11	Длина воротника по отлету, см	164-170	30,0	30,5	31,0	31,5	32,0	32,5	33,0	33,5	(+/-0,5)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 214 из 529

B57. Халат медицинский женский модель 1174.

Описание модели

Халат медицинский женский из белой ткани полуприлегающего силуэта, длиной выше колена, со съёмным завязывающимся поясом шириной 3,2-3,4 см, с разрезами в боковых швах.

Перед с центральной бортовой застежкой на 7 обметанных петель и 7 пуговиц; с круглым вырезом горловины; застроченными наружу вытачками, выходящими из горловины и заканчивающимися выше линии груди; с фигурными рельефными швами, выходящими из пройм и заканчивающимися в боковых швах ниже линии талии; с карманами в рельефных швах.

Спинка со средним швом; с рельефными швами, выходящими из пройм и доходящими до низа; с декоративной шлевкой шириной 3,9-4,1 см для продевания пояса, настроенной на средний шов на уровне линии талии.

Рукава втачные, двухшовные (со средним и нижними швами), длинные. Низ рукавов должен быть обработан широкой подгибкой, края которой должны быть зафиксированы строчкой на расстоянии 9,5 см от подогнутого края, а в средних швах должны быть обработаны разрезы длиной 4,3-4,5 см.

Воротник-стойка шириной 2,9-3,1 см с закругленными концами, вшитая до вытачек.

По рельефам, разрезам, низу рукавов, краям бортов, пояса, шлевки и воротника должны быть проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В углах разрезов, карманов и шлевки должны быть установлены закрепки на спецмашине.

В качестве фурнитуры должны использоваться пластмассовые пуговицы диаметром 1,5-1,7 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки белого цвета, для закрепок и пришивания пуговиц- красные.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.



Рисунок В57–Халат медицинский женский модель 1174.

Таблица В57.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 1174

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет. кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	2	1
4	Бочок спинки	2	1
5	Передняя половинка рукава	2	1
6	Задняя половинка рукава	2	1
7	Мешковина кармана	2	1
8	Воротник	2	1
9	Пояс	2	1
10	Подборт	2	1
11	Шлевка	1	0
	ИТОГО	21	10

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-
2023, ред.2

Страница 216 из 529

Таблица В57.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 1174

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	87,2	87,5	87,7	88,0	88,2	88,5	88,8	89,1	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	32,6	33,4	34,1	34,8	35,5	36,3	37,0	37,7	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	90,8	91,3	91,8	92,3	92,8	93,4	94,0	94,6	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	54,5	56,4	58,3	60,2	62,1	64,0	65,9	67,8	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	57,4	57,6	57,8	58,0	58,3	58,6	58,8	59,0	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	17,3	18,0	18,6	19,3	20,0	20,7	21,4	22,3	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	12,0	12,2	12,5	12,8	13,0	13,2	13,4	13,6	(+/-0,5)
9	Длина воротника по отлету, см	164-170	37	38	39	40	41	42	43	44	(+/-0,5)

Продолжение Таблицы В57.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	89,4	89,8	90,2	90,6	91,0	91,4	91,8	92,2	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	38,5	39,1	39,7	40,3	40,9	41,5	42,1	42,7	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	95,3	96,1	97,0	97,7	98,4	99,1	99,8	100,5	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	69,7	71,6	73,5	75,4	77,3	79,2	81,1	83,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	59,2	59,4	59,6	59,8	60,0	60,2	60,4	60,6	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	23,2	24,0	24,8	25,6	26,4	27,2	27,9	28,6	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	13,8	14,0	14,3	14,6	14,9	15,2	15,4	15,6	(+/-0,5)
9	Длина воротника по отлету, см	164-170	45	46	47	48	49	50	51	52	(+/-0,5)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 217 из 529

В58. Халат медицинский женский модель 1309.

Описание модели

Халат медицинский женский длиной до низа колена, полуприлегающего силуэта, без воротника, с фигурным вырезом горловины, обработанным обтачкой.

Перед с центральной бортовой застежкой на 6 кнопок; с притачными кокетками; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа; с двумя верхними накладными карманами трапециевидной формы, передними боковыми срезами, входящими в рельефные швы на уровне линии груди; с двумя нижними карманами, обработанными в фигурных швах подрезов на боковых частях переда ниже линии талии.

Спинка с притачной кокеткой; с вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скрепленными посередине спинки с помощью кнопки. Для регулировки степени прилегания изделия по талии на правом полупоясе должны быть установлены две нижних части кнопки на расстоянии 2,5см.

Рукава втачные, одношовные, короткие, с притачными манжетами шириной 4,2-4,4см.

По кокеткам, рельефам, краям бортов, горловине, верхним краям карманов, по швам настрочивания карманов и нижним краям поясов должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158; 164-170; 176-182.

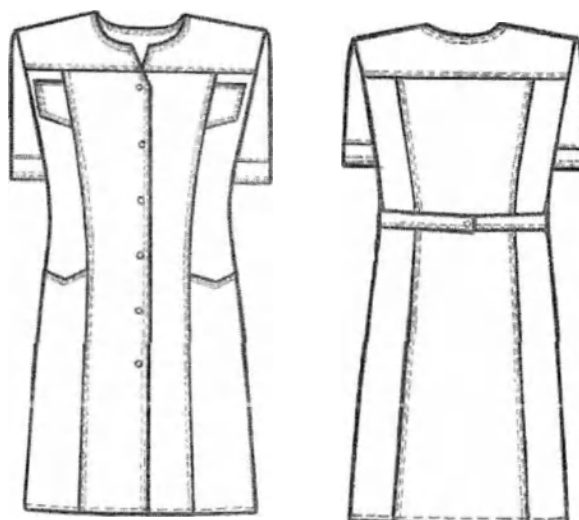


Рисунок В58—Халат медицинский женский модель 1309

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 218 из 529

Таблица B58.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский женский модель 1309

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Верхняя часть бочка полочки	2	1
3	Нижняя часть бочка полочки	2	1
4	Кокетка полочки	2	1
5	Спинка	1	0
6	Бочок спинки	2	1
7	Кокетка спинки	1	0
8	Рукав	2	1
9	Манжета	2	1
10	Верхний карман	2	1
11	Полупояс	2	1
12	Мешковина кармана	2	1
13	Обтачка горловины спинки	1	0
14	Подборт	2	1
	Итого:	25	11

Таблица B58.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Халат медицинский женский модель 1309

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	96.0 102.0 105.0	96.5 102.5 105.5	97.0 103.0 106.0	97.5 103.5 106.5	98.0 104.0 107.0	98.4 104.4 107.4	98.7 104.7 107.7	99.0 105.0 108.0	(+/-)1.0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35.5	36.5	37.5	38.5	39.5	40.5	41.4	42.3	(+/-)0.5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	98.4 104.4 107.4	99.3 105.3 108.3	100.0 106.0 109.0	100.8 106.8 109.8	101.7 107.7 110.7	102.6 108.6 111.6	103.5 109.5 112.5	104.4 110.4 113.4	(+/-)1.0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0	(+/-)1.0
5	Ширина изделия внизу (с учетом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	(+/-)1.0
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	23.3 25.3 26.3	23.7 25.7 26.7	24.1 26.1 27.1	24.5 26.5 27.5	24.7 26.7 27.7	25.0 27.0 28.0	25.2 27.2 28.2	25.4 27.4 28.4	(+/-)1.0
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17.3	17.8	18.4	19.0	19.6	20.3	21.0	21.6	(+/-)0.5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16.0	16.6	17.2	17.8	18.4	19.0	19.6	20.2	(+/-)0.5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	7.2	7.4	7.6	7.9	8.2	8.5	8.8	9.0	(+/-)0.3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	11.2	11.4	11.5	11.6	11.8	11.9	12.0	12.2	(+/-)0.3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	12.8	13.6	14.4	15.2	15.9	16.8	17.7	18.7	(+/-)0.3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 219 из 529

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	18,3	18,5	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,8	(+/-)0,3

Продолжение Таблицы В58.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	99,3	99,5	99,7	99,9	100,1	100,3	100,5	100,7	(+/-)1,0
		164-170	105,3	105,5	105,7	105,9	106,1	106,3	106,5	106,7	
		176-182	108,3	108,5	108,7	108,9	109,1	109,3	109,5	109,7	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,2	44,0	44,8	45,4	46,1	46,8	47,4	48,0	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	105,3	106,2	107,1	108,0	108,9	109,8	110,7	111,6	(+/-)1,0
		164-170	111,3	112,2	113,1	114,0	114,9	115,8	116,7	117,6	
		176-182	114,3	115,2	116,1	117,0	117,9	118,8	119,7	120,6	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,0	62,1	64,2	66,3	68,4	70,5	72,6	74,8	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	72,0	74,1	76,2	78,3	80,4	82,5	84,6	86,8	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	25,8	26,1	26,4	26,6	26,9	27,2	27,4	27,7	(+/-)1,0
		164-170	27,8	28,1	28,4	28,6	28,9	29,2	29,4	29,7	
		176-182	28,8	29,1	29,4	29,6	29,9	30,2	30,4	30,7	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,3	23,1	23,9	24,7	25,5	26,2	26,8	27,5	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	20,8	21,4	22,0	22,6	23,2	23,8	24,4	25,0	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	9,3	9,6	9,9	10,2	10,5	10,8	11,0	11,2	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,4	12,6	12,8	13,0	13,3	13,5	13,8	14,5	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	19,6	20,5	21,4	22,4	23,4	24,4	25,4	26,4	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	18,9	18,9	19,0	19,0	19,2	19,2	19,2	19,5	(+/-)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 220 из 529

В59. Блуза медицинская женская модель 301Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер, полуприлегающего силуэта.

Перед с центральной бортовой застежкой на 5 обметанных петель и 5 пуговиц; с притачными кокетками; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа; с двумя верхними накладными карманами, передним боковым срезом входящими в рельефные швы на уровне линии груди; с двумя нижними накладными карманами. боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы. Линии входа в нижние карманы дугообразные и обработанные притачными планками шириной 3,4-3,6см. Из шва притачивания планки каждого кармана выходят по 3 веерообразно расходящихся защипа глубиной 0,1-0,2см, не доходящих до низа карманов.

Спинка с притачной кокеткой; с вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с двумя полупоясами,шитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скрепленными посередине с помощью пуговицы.

Рукава втачные, одношовные, короткие (длиной выше локтя), с притачными планками шириной 2,9-3,1см. Из шва притачивания планки посередине каждого рукава выходят по 3 веерообразно расходящихся защипа глубиной 0,1-0,2см, не доходящих до верха рукавов.

Воротник на спинке выполнен в виде отрезной стойки, а на передке в виде цельновыкроенной стойки, плавно переходящей в неглубокий V-образный вырез.

Кокетки передка и спинки, воротник, планки карманов и рукавов – должны быть выполнены из отделочной ткани.

По краям бортов и горловины, рельефам, кокеткам, шву втачивания воротника в горловину спинки и швам притачивания планок к рукавам и карманам, полупоясам, низу рукавов, по верхним краям и швам настрачивания нижних карманов, а также по швам настрачивания верхних карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

По линиям входа в верхние карманы и по низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться пластиковые пуговицы диаметром 1,7-1,9см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 221 из 529

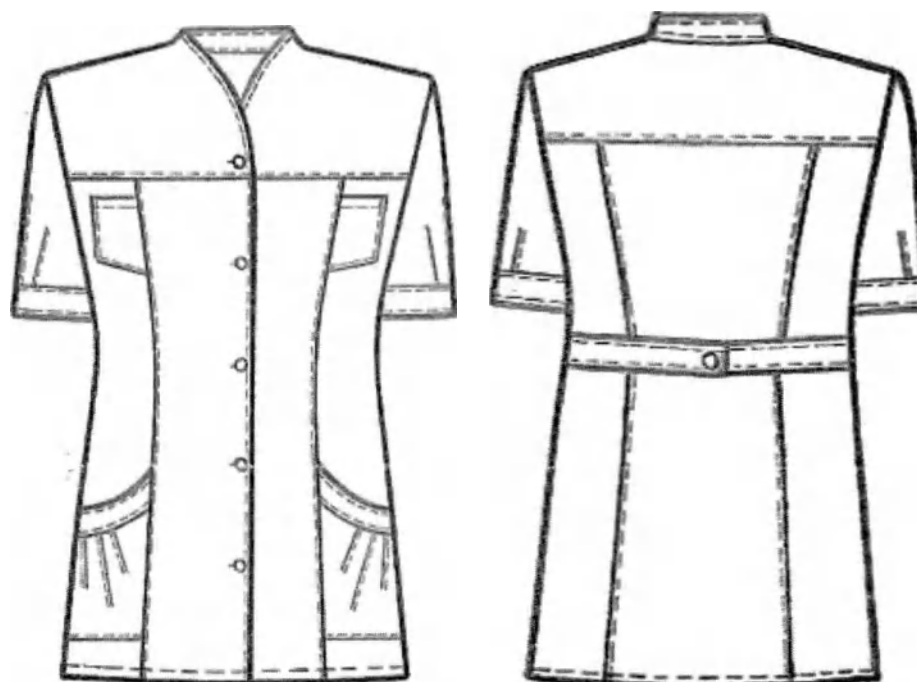


Рисунок В59–Блуза медицинская женская модель 301Б

Таблица В59.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 301Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет. кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	1	0
4	Бочок спинки	2	1
5	Рукав	2	1
6	Карман верхний	2	1
7	Карман нижний	2	1
8	Полупояс	2	1
9	Нижняя часть подборта	2	1
Отделочная ткань			
10	Кокетка полочки	2	1
11	Кокетка спинки	1	0
12	Планка рукава	2	1
13	Планка кармана	2	1
14	Воротник	2	1
15	Верхняя часть подборта	2	1
Итого		28	13

Таблица В59.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 301Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	66,3	66,8	67,3	67,8	68,3	68,7	69,0	69,3	(+/-)1,0
		164-170	70,3	70,8	71,3	71,8	72,3	72,7	73,0	73,3	
		176-182	72,3	72,8	73,3	73,8	74,3	74,7	75,0	75,3	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,2	36,1	37,0	37,9	38,8	39,7	40,6	41,4	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	68,6	69,5	70,3	71,1	71,9	72,8	73,6	74,4	(+/-)1,0
		164-170	72,6	73,5	74,3	75,1	75,9	76,8	77,6	78,4	
		176-182	74,6	75,5	76,3	77,1	77,9	78,8	79,6	80,4	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,2	46,3	48,4	50,5	52,6	54,7	56,8	58,9	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	51,2	53,2	55,2	57,2	59,3	61,4	63,4	65,3	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	23,7	23,8	23,9	24,3	24,7	24,8	25,2	25,5	(+/-)0,5
		164-170	25,7	25,8	25,9	26,3	26,7	26,8	27,2	27,5	
		176-182	26,7	26,8	26,9	27,3	27,7	27,8	28,2	28,5	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,1	17,6	18,1	18,7	19,3	20,0	20,7	21,5	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,3	16,8	17,4	18,0	18,6	19,2	19,8	20,4	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	6,8	7,0	7,2	7,4	7,8	7,8	8,2	8,4	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	10,0	10,2	10,5	11,0	11,5	12,0	12,1	12,3	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по нижнему краю, см	все роста	15,3	16,0	17,0	17,8	18,6	19,1	19,6	20,6	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	21,5	21,9	22,0	22,3	22,6	22,8	23,2	23,3	(+/-)0,3

Продолжение Таблицы В59.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	69,6	69,8	70,0	70,2	70,4	70,6	70,8	71,0	(+/-)1,0
		164-170	73,6	73,8	74,0	74,2	74,4	74,4	74,8	75,0	
		176-182	75,6	75,8	76,0	76,2	76,4	76,6	76,8	77,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	42,2	43,0	43,8	44,6	45,4	46,2	47,0	47,8	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	75,2	76,0	76,8	77,6	78,4	79,3	80,2	81,1	(+/-)1,0
		164-170	79,2	80,0	80,8	81,6	82,4	83,3	84,2	85,1	
		176-182	81,2	82,0	82,8	83,6	84,4	85,3	86,2	87,1	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,9	62,8	65,1	67,2	69,3	71,4	73,5	75,6	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	67,3	69,3	71,3	73,4	75,5	77,6	79,7	81,7	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	25,7	26,3	26,4	26,6	26,7	26,8	26,9	27,2	(+/-)0,5
		164-170	27,7	28,3	28,4	28,6	28,7	28,8	28,9	29,2	
		176-182	28,7	29,3	29,4	29,6	29,7	29,8	29,9	30,2	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 223 из 529

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,3	23,1	23,8	24,5	25,1	25,7	26,2	26,8	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	21,1	21,8	22,5	23,3	24,0	24,5	24,9	25,6	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	8,6	8,7	8,8	9,2	9,3	9,5	9,9	11,0	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,5	12,8	13,3	13,7	14,1	14,7	15,4	16,3	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по нижнему краю, см	все роста	21,6	22,5	23,5	22,0	22,0	22,2	22,6	23,0	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	23,4	23,5	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	(+/-)0,3

В60. Блуза медицинская женская модель 302Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская удлиненная (длина до середины бедра), полуприлегающего силуэта, отрезная выше линии талии на 8см; без воротника, с круглым вырезом горловины, обработанным обтачкой; с разрезами в боковых швах.

Перед с центральной бортовой застежкой на две пары кнопок в верхней части изделия и три отдельных кнопки в нижней части; с рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с двумя верхними накладными карманами, передним боковым срезом входящими в рельефные швы на уровне линии груди; с двумя нижними накладными карманами, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы, а верхний срез оформлен притачной планкой шириной 3,5-3,7см и декоративной патой шириной 3,3-3,5см, одним концом входящей в рельефный шов, а другим пристегивающейся к планке кармана на кнопку. В передней части карманов заложены по два декоративных вертикальных защипа глубиной 0,7-0,8см. Расстояние между защипами 2,0см.

Спинка с рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скрепленными посередине спинки с помощью кнопки. Для регулировки степени прилегания по талии на правом полупоясе должны быть установлены две нижних части кнопки с расстоянием 2,5см.

Рукава втачные, одношовные, длиной $\frac{3}{4}$. Параллельно нижнему краю рукавов должен быть застрочен защип глубиной 0,6-0,7см, имитирующий отложные манжеты шириной 3,5-3,6см.

Верхние части переда и спинки, а также декоративные паты карманов должны быть выполнены из отделочной ткани, остальные детали - из основной ткани.

По швам настрачивания верхних и нижних карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края.

По горловине, краям бортов, рельефам, швам соединения верхней и нижней частей переда и спинки, по верхним краям карманов, по швам притачивания планок к карманам,

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA* по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

по низу рукавов, латам и полупоясам (со всех сторон) - должна быть проложена отделочная строчка на расстоянии 0,6-0,7см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,1-1,3см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.



Рисунок В60—Блуза медицинская женская модель 302Б

Таблица В60.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 302Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Нижняя часть полочки	2	1
2	Нижняя часть бочка полочки	2	1
3	Нижняя часть спинки	1	0
4	Нижняя часть бочка спинки	2	1
5	Карман нижний	2	1
6	Планка кармана	2	1
7	Рукав	2	1
8	Полупояс	2	1
9	Нижняя часть подборта	2	1
Отделочная ткань			
10	Полочка	2	1

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

11	Бочок полочки	2	1
12	Спинка	1	0
13	Бочок спинки	2	1
14	Верхний карман	2	1
15	Пата	2	1
16	Верхняя часть подборта	2	1
17	Обтачка горловины спинки	1	0
Итого		31	14

Таблица В60.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 302Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	75,7 81,7 84,7	76,0 82,0 85,0	76,5 82,5 85,5	77,0 83,0 86,0	77,5 83,5 86,5	77,8 83,8 86,8	78,1 84,1 87,1	78,4 84,4 87,4	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	78,4 84,4 87,4	79,1 85,1 88,1	79,8 85,8 88,8	80,5 86,5 89,5	81,2 87,2 90,2	81,9 87,9 90,9	82,5 88,5 91,5	83,4 89,4 92,4	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	43,5	45,5	47,5	49,6	51,7	53,8	55,9	58,0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полуканоса застёжки), см	все роста	53,5	55,5	57,5	59,6	61,7	63,8	65,9	68,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	40,6 43,6 45,1	40,8 43,8 45,3	41,0 44,0 45,5	41,2 44,2 45,7	41,4 44,4 45,9	41,6 44,6 46,1	41,8 44,8 46,3	42,0 45,0 46,5	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	15,9	16,7	17,5	18,3	19,1	19,9	20,7	21,5	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,2	15,5	15,8	16,0	16,3	16,5	16,8	17,1	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	8,0	8,0	8,0	8,0	8,1	8,1	8,1	8,3	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,0	12,3	12,3	12,3	12,4	12,4	12,5	12,6	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	13,8	14,5	15,2	15,9	16,6	17,3	18,1	19,0	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	18,2	18,2	18,3	18,5	18,6	18,8	18,8	19,1	(+/-)0,3

Продолжение Таблицы В60.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	78,7 84,7 87,7	79,0 85,0 88,0	79,3 85,3 88,3	79,5 85,5 88,5	79,8 85,8 88,8	80,0 86,0 89,0	80,3 86,3 89,3	80,5 86,5 89,5	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,4	44,3	45,2	46,0	46,8	47,7	48,6	49,5	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	84,2 90,2 93,2	85,1 91,1 94,1	86,0 92,0 95,0	86,9 92,9 95,9	87,8 93,8 96,8	88,7 94,7 97,7	89,6 95,6 98,6	90,6 96,6 99,6	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,1	62,2	64,4	66,6	68,8	71,0	73,2	75,4	(+/-)1,0

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоцелевого использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	70.1	72.2	74.4	76.6	78.8	81.0	83.2	85.4	(+/-)1.0
6	Длина рукава, см	152-158	42.2	42.4	42.6	42.9	43.1	43.3	43.5	43.7	(±)0.5
		164-170	45.2	45.4	45.6	45.9	46.1	46.3	46.5	46.7	
		176-182	46.7	46.9	47.1	47.4	47.6	47.8	48.0	48.2	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22.3	23.0	23.7	24.4	25.0	25.6	26.2	26.8	(+/-)0.5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	17.3	17.6	17.9	18.3	18.7	19.1	19.5	20.0	(+/-)0.5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	8.4	8.6	8.7	8.8	9.0	9.3	9.6	9.8	(+/-)0.3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12.6	12.7	13.0	13.1	13.2	13.2	13.3	13.4	(+/-)0.3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	20.0	20.9	21.9	22.8	22.0	22.5	22.8	23.2	(+/-)0.3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	19.1	19.1	19.2	19.3	19.6	19.6	19.6	19.7	(+/-)0.3

В61. Блуза медицинская женская модель 303Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская прямого силуэта, умеренного объема; длиной ниже линии бедер, спинка длиннее переда на 7,0 см, с плавным переходом длины; с притачной кокеткой, на спинке выше уровня лопаток, а на передке шириной 4,0 см; с разрезами в боковых швах.

Перед с центральной бортовой застежкой на 5 обметанных петель и 5 пуговиц или 5 кнопок, обработанной притачными планками шириной 2,7-2,9 см, расходящимися вверху, образуя неглубокий V-образный вырез; с дугообразными подрезами, выходящими из краев борта полочек ниже линии груди и заканчивающимися в боковых швах под проймой; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокетки и заканчивающимися в швах прорезов; с шестью вертикальными заплатами глубиной 0,1-0,2 см, отстроченными на центральных деталях верхней части переда; с двумя боковыми накладными карманами фигурной формы.

Спинка со средним швом.

Рукава втачные, одношовные, короткие (длиной выше локтя), с притачными отложными манжетами шириной 3,4-3,6 см и прямоугольными декоративными паттами шириной 2,5-2,7 см, вшитыми одним концом в швы притачивания манжет посередине рукавов, а другим концом прикрепляющимися к рукавам с помощью пуговиц или кнопок.

Воротник – стойка.

По кокетке, рельефам, подрезам, краям воротника, планок, пат, разрезов, шву втачивания воротника в горловину и швам настрачивания карманов и планок под застежку должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По верхним краям карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,4-2,6 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 0,7-0,8 см от края.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические пуговицы диаметром 1,1-1,3 см или кнопки диаметром 0,9-1,0 см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.



Рисунок В61–Блуза медицинская женская модель 303Б

Таблица В61.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 303Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Верхняя часть полочки	2	1
2	Бочок верхней части полочки	2	1
3	Нижняя часть полочки	2	1
4	Спинка	2	1
5	Кокетка	1	0
6	Рукав	2	1
7	Манжета	2	1
8	Карман	2	1
9	Воротник	2	1
10	Планка под застежку	4	2
11	Пата рукава	2	1
Итого		23	11

В61.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 303Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	69.7	70.6	70.8	71.1	71.4	72.2	72.3	72.7	(±)1,0
		164-170	73.7	74.6	74.8	75.1	75.4	76.2	76.3	76.7	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

		176-182	75,7	76,6	76,8	77,1	77,4	78,2	78,3	78,7	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,5	36,8	37,8	38,6	39,8	40,8	41,7	42,4	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	66,4 70,4 72,4	66,8 70,8 72,8	67,4 71,4 73,4	68,3 72,3 74,3	69,0 73,0 75,0	69,8 73,8 75,8	70,6 74,6 76,6	71,5 75,5 77,5	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	46,6	48,7	50,8	53,0	55,2	57,4	59,5	61,5	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	50,0	52,2	54,4	56,6	58,8	61,0	63,0	65,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	23,5 25,5 26,5	23,9 25,9 26,9	24,2 26,2 27,2	24,4 26,4 27,4	24,7 26,7 27,7	25,0 27,0 28,0	25,2 27,2 28,2	25,5 27,5 28,5	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,5	17,9	18,3	18,8	19,6	20,2	21,0	21,8	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,2	16,4	16,9	17,5	18,1	18,6	19,2	20,0	(+/-)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	13,9	15,0	15,0	15,0	16,2	16,2	16,2	17,2	(+/-)0,3
10	Глубина нижнего кармана посередине, см	все роста	16,2	16,6	16,6	16,6	16,8	16,8	16,8	17,0	(+/-)0,3
11	Длина воротника по отлету, см	все роста	36,0	36,8	38,0	38,8	39,6	40,6	41,2	42,0	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В61.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	73,0 77,0 79,0	73,2 77,2 79,2	73,5 77,5 79,5	73,8 77,8 79,8	74,0 78,0 80,0	74,2 78,2 80,2	74,5 78,5 80,5	74,8 78,8 80,8	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,2	44,0	44,6	45,2	46,0	46,8	47,6	48,4	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	72,3 76,3 78,3	73,3 77,3 79,3	74,3 78,3 80,3	75,4 79,4 81,4	76,4 80,4 82,4	77,4 81,4 83,4	78,5 82,5 84,5	79,5 83,5 85,5	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	63,6	65,7	67,9	70,1	72,2	74,2	76,2	78,2	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	67,0	69,0	71,0	73,1	75,2	77,3	79,4	81,5	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	25,9 27,9 28,9	26,2 28,2 29,2	26,4 28,4 29,4	26,6 28,6 29,6	26,8 28,8 29,8	27,0 29,0 30,0	27,2 29,2 30,2	27,4 29,4 30,4	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,8	23,5	24,2	24,9	25,6	26,3	27,0	27,7	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	20,5	21,0	21,8	22,4	23,0	23,6	24,2	24,8	(+/-)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	17,2	17,8	17,8	17,8	18,5	18,5	19,0	19,0	(+/-)0,3
10	Глубина нижнего кармана посередине, см	все роста	17,0	17,4	17,4	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6	(+/-)0,3
11	Длина воротника по отлету, см	все роста	42,6	43,2	43,8	44,4	45,0	45,6	46,2	46,8	(+/-)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многократного использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 229 из 529

В62. Блуза медицинская женская модель 304Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер, полуприлегающего силуэта, со смещенными на 3,0 см вперед плечевыми швами.

Перед с центральной бортовой застежкой до верха на 5 кнопок, с притачными планками под застежку шириной 4,0-4,2 см; с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с вертикальными швами, выходящими из нижней части пройм и доходящими до низа; с боковыми карманами в швах притачивания бочков.

Спинка с притачной кокеткой; с вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скрепленными посередине спинки с помощью кнопки. Для регулировки степени прилегания изделия по талии на правом полупоясе должны быть установлены две нижние части кнопки с расстоянием 2,5 см.

Рукава втачные, двухшовные, с нижними и средними швами длиной $\frac{3}{4}$. средние швы должны быть смещены на 3,0 см вперед и являться продолжением плечевых швов.

Все детали переда, кроме отрезных бочков, а также передние части рукавов должны быть выполнены из основной ткани №1, а все остальные детали – из основной ткани №2. Основные ткани №1 и №2 должны быть в контрастном сочетании друг с другом (ткань №2 темнее, чем ткань №1).

По рельефам, швам притачивания бочков, кокетке, плечевым швам, краям бортов, воротника, полупоясов, средним швам рукавов, швам притачивания планок под застежку и шву втачивания воротника в горловину должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,6-2,8 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,2-1,4 см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 230 из 529

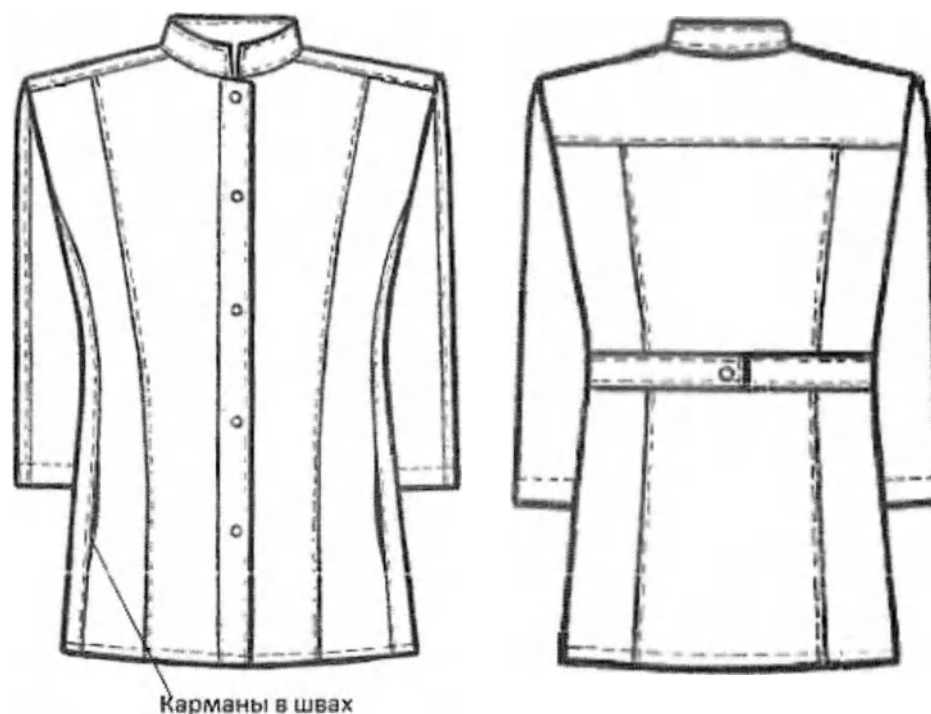


Рисунок В62–Блуза медицинская женская модель 304Б

Таблица В62.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 304Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Средняя часть полочки	2	1
3	Планка застежки	2	1
4	Передняя часть рукава	2	1
5	Мешковина кармана	2	1
Отделочная ткань			
6	Спинка	1	0
7	Бочок спинки	2	1
8	Бочок полочки	2	1
9	Задняя часть рукава	2	1
10	Воротник	2	1
11	Кокетка	1	0
12	Полупояс	2	1
Итого		22	10

Таблица В62.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 304Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	все роста	66,5	66,8	67,2	67,7	68,3	69,0	69,2	69,5	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,5	36,5	37,5	38,5	39,4	40,3	41,2	42,1	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	все роста	69,3	70,2	71,0	71,8	72,6	73,5	74,3	75,0	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,6	46,7	48,8	50,9	53,0	55,1	57,2	59,3	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	50,0	52,0	54,0	56,0	58,1	60,2	62,2	64,2	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	40,7	40,9	41,1	41,4	41,7	42,0	42,2	42,4	(+/-)1,0
		164-170	43,7	43,9	44,1	44,4	44,7	45,0	45,2	45,4	
		176-182	45,2	45,4	45,6	45,9	46,2	46,5	46,7	46,9	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,2	17,7	18,3	18,9	19,5	20,2	20,9	21,5	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,4	15,8	16,0	16,2	16,5	16,8	17,2	17,5	(+/-)0,5
9	Длина воротника по отлету, см	все роста	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В62.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	все роста	70,0	70,5	72,5	72,7	73,0	73,2	73,4	73,6	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,0	43,9	44,8	45,4	46,1	46,8	47,4	48,0	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	все роста	76,0	76,8	79,5	80,3	81,1	82,0	82,9	83,8	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	61,3	63,4	65,5	67,6	69,7	71,8	73,9	76,0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	66,2	68,2	70,2	72,2	74,3	76,4	78,5	80,5	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	42,6	42,9	43,0	43,1	43,2	43,3	43,4	43,5	(+/-)1,0
		164-170	45,6	45,9	46,0	46,1	46,2	46,3	46,4	46,5	
		176-182	47,1	47,4	47,5	47,6	47,7	47,8	47,9	48,0	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,2	23,0	23,8	24,6	25,4	26,1	26,7	27,4	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	17,8	18,2	18,8	19,4	20,0	20,6	21,2	21,8	(+/-)0,5
9	Длина воротника по отлету, см	все роста	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	(+/-)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В63. Блуза медицинская женская модель 305Б.

Описание модели

Блуза женская удлиненная (длиной до середины бедра), прямого силуэта, умеренного объема; с разрезами в боковых швах.

Перед с центральной бортовой застёжкой на 2 ряда кнопок – по 4 в ряду, с расстоянием 12,0см между рядами; со вставкой в виде втачного пояса шириной 4,7-4,9см (нижний край вставки – на 4,0см выше линии талии); с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов, прерывающимися на поясе и доходящими до низа; с двумя верхними накладными карманами, входящими передними срезами в рельефные швы на уровне линии груди; с двумя нижними накладными карманами с наклонным входом, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы, а верхние края обработаны фигурными планками шириной 3,8-4,0см, состоящими из двух пришитых внахлест частей. В месте соединения частей планок должен быть установлен металлический хольнитен.

Спинка со вставкой в виде втачного пояса шириной 4,4-4,9см, швы втачивания которого должны являться продолжением швов втачивания пояса на перед; с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов, прерывающимися на поясе и доходящими до низа.

Рукава втачные, одношовные, длиной $\frac{3}{4}$, с притачными планками шириной 3,8-4,0см, состоящими из двух пришитых внахлест частей. В месте соединения частей планок посередине рукава должен быть установлен металлический хольнитен.

Воротник – стойка.

По рельефам, краям бортов, разрезов, воротника, планок рукавов и карманов, швам притачивания планок рукавов и карманов, швам настрачивания карманов и шву втачивания воротника в горловину должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1–0,2см от края или шва.

По линиям входа верхних карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,8-2,0см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,1–1,3см и металлические хольнитены диаметром 0,5–0,6см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.



Рисунок В63–Блуза медицинская женская модель 305Б

Таблица В63.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 305Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Верхняя часть полочки	2	1
2	Нижняя часть полочки	2	1
3	Верхняя часть спинки	1	0
4	Нижняя часть спинки	1	0
5	Верхняя часть бочка полочки	2	1
6	Нижняя часть бочка полочки	2	1
7	Верхняя часть бочка спинки	2	1
8	Нижняя часть бочка спинки	2	1
9	Рукав	2	1
10	Манжета	2	1
11	Втачной пояс полочки	2	1
12	Втачной пояс спинки	1	0
13	Верхний карман	2	1
14	Нижний карман	2	1
15	Передняя часть планки кармана	4	2
16	Задняя часть планки кармана	4	2
17	Воротник	2	1
18	Подборт	2	1
Итого		37	17

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 234 из 529

таблица В63.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 305Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	75,0	75,5	76,0	76,5	77,0	77,5	77,9	78,3	(+/-)1,0
		164-170	80,0	80,5	81,5	81,5	82,0	82,5	82,9	83,3	
		176-182	83,0	83,5	84,5	84,5	85,0	85,5	85,9	86,3	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	34,5	35,5	37,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	77,4	78,3	80,1	80,1	81,0	81,9	83,0	84,0	(+/-)1,0
		164-170	82,4	83,3	85,1	85,1	86,0	86,9	88,0	89,0	
		176-182	85,4	86,3	88,1	88,1	89,0	89,9	91,0	92,0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	43,0	45,0	47,0	49,2	51,3	53,4	55,5	57,5	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	40,5	40,6	40,7	41,0	41,2	41,7	42,0	42,1	(+/-)0,5
		164-170	43,5	43,6	43,7	44,0	44,2	44,7	45,0	45,1	
		176-182	45,0	45,1	45,2	45,5	45,7	46,2	46,5	46,1	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	16,8	17,5	18,2	18,8	19,5	20,3	21,0	21,8	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,3	15,5	15,8	16,0	16,2	16,5	16,8	17,1	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	8,2	8,3	8,4	8,4	8,1	8,1	8,3	8,9	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,7	12,7	12,7	12,7	12,3	12,4	12,5	12,7	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	13,7	14,6	15,4	16,2	16,9	17,6	18,2	19,5	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	20,5	20,6	20,7	20,8	20,9	21,0	21,0	21,1	(+/-)0,3

Продолжение Таблицы В63.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	78,7	79,2	79,5	79,9	80,3	80,7	81,1	81,5	(+/-)1,0
		164-170	83,7	84,2	84,5	84,9	85,3	85,7	86,1	86,5	
		176-182	86,7	87,2	87,5	87,9	88,3	88,7	89,1	89,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	42,5	43,5	44,5	45,5	46,4	47,3	48,2	49,1	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	85,0	86,4	87,2	88,4	89,5	90,5	91,5	92,5	(+/-)1,0
		164-170	90,0	91,4	92,2	93,4	94,5	95,5	96,5	97,5	
		176-182	93,0	94,4	95,2	96,4	97,5	98,5	99,5	100,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	59,7	61,9	64,1	66,3	68,5	70,7	72,9	75,1	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	70,0	72,0	74,0	76,0	78,2	80,4	82,6	84,8	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	42,2	42,5	42,7	43,1	43,5	43,7	43,9	44,1	(+/-)0,5
		164-170	45,2	45,5	45,7	46,1	46,5	46,7	46,9	47,1	
		176-182	46,7	47,0	47,2	47,6	48,0	48,2	48,4	48,6	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,5	23,2	23,9	24,6	25,3	26,0	26,7	27,4	(+/-)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 235 из 529

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	17,5	18,2	18,8	19,3	19,9	20,4	20,9	21,4	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	9,1	9,5	9,6	9,9	10,5	11,0	11,2	11,5	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,9	13,0	13,1	13,5	13,7	14,0	14,1	14,2	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	20,7	21,2	22,0	23,0	24,2	25,5	26,3	27,1	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	21,4	21,6	21,6	21,7	21,8	22,0	22,1	22,2	(+/-)0,3

В64. Блуза медицинская женская модель 306Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер, слегка приталенная; без воротника, с V-образным вырезом горловины, оформленным декоративными дугообразными планками, в швы притачивания которых должен быть проложен кант с наполнителем, и обработанным обтачкой.

Перед с рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с двумя нижними накладными карманами, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы, а верхние края наклонные, оформлены кантом с наполнителем и треугольными декоративными вставками. Ширина канта в готовом виде должна составлять 0,3-0,4 см.

Спинка с отрезной кокеткой, средним швом, двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и завязывающимися посередине спинки.

Рукава втачные, одношовные, длиной до локтя. Низ рукавов должен быть оформлен подгибкой шириной 2,4-2,6 см, застроченной на лицевую сторону.

По горловине, рельефам, кокетке и среднему шву спинки, краям бортов и декоративных вставок, швам застрачивания поясов и подгибки рукавов, швам притачивания планок горловины и швам настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,2-0,2 см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

Кант для отделки должен использоваться в контрастном сочетании с цветом основной ткани.

В качестве фурнитуры должны использоваться пластиковые пуговицы диаметром 1,7-1,9 см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 236 из 529

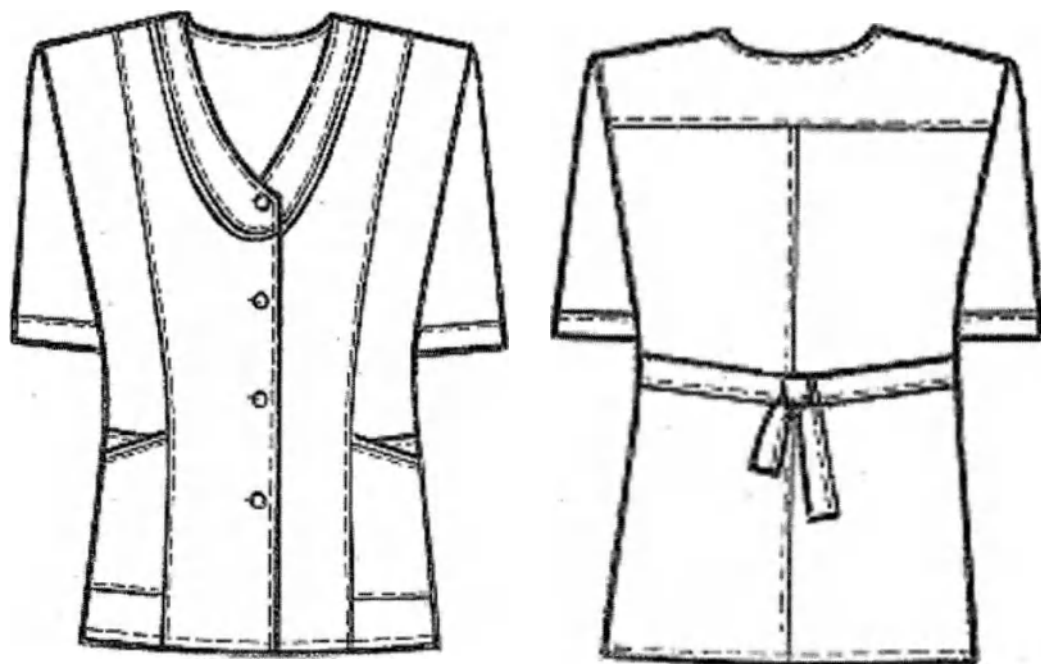


Рисунок В64—Блуза медицинская женская модель 306Б

Таблица В64.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 306Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	2	1
4	Кокетка спинки	1	0
5	Планка горловины полочки	2	1
6	Рукав	2	1
7	Карман	2	1
8	Вставка кармана	2	1
9	Обтачка кармана	2	1
10	Полупояс	2	1
11	Подборг	2	1
12	Обтачка горловины спинки	1	0
Итого		22	10

Таблица В64.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 306Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	66,5	67,0	67,5	68,1	68,5	68,9	69,7	70,	(±)1,0
		164-170	70,5	71,0	71,5	72,1	72,5	72,9	73,7	74,0	
		176-182	72,5	73,0	73,5	74,1	74,5	74,9	75,7	76,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	36,6	37,5	38,3	39,2	40,2	41,1	42,0	42,7	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	69,5	70,8	71,5	72,3	73,0	73,9	75,0	75,3	(±)1,0
		164-170	73,5	74,8	75,5	76,3	77,0	77,9	79,0	79,3	
		176-182	75,5	76,8	77,5	78,3	79,0	79,9	81,0	81,3	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	46,5	48,6	50,7	52,8	54,9	57,0	59,1	61,3	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	52,0	54,1	56,2	58,3	60,4	62,5	64,6	66,8	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	34,8	34,9	35,0	35,2	35,4	35,8	36,2	36,4	(±)0,5
		164-170	37,8	37,9	38,0	38,2	38,4	38,8	39,2	39,4	
		176-182	39,3	39,4	39,5	39,7	39,9	40,3	40,7	40,9	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	18,0	18,6	19,3	19,9	20,5	21,2	22,0	22,8	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,6	16,0	16,4	16,8	17,1	17,5	18,0	18,7	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	13,3	14,2	15,0	15,8	16,6	17,4	18,2	19,1	(±)0,5
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	17,0	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,9	(±)0,5

Продолжение Таблицы В64.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	71,2	71,4	72,2	72,1	72,5	73,1	74,1	74,4	(±)1,0
		164-170	75,2	75,4	76,2	76,1	76,5	77,1	78,1	78,4	
		176-182	77,2	77,4	78,2	78,1	78,5	79,1	80,1	80,4	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,3	44,1	45,0	45,6	46,3	47,1	48,0	48,8	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	76,7	77,7	79,2	79,5	80,9	82,0	83,8	86,0	(±)1,0
		164-170	80,7	81,7	83,2	83,5	84,9	86,0	87,8	90,0	
		176-182	82,7	83,7	85,2	85,5	86,9	88,0	89,8	92,0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	63,4	65,5	67,6	69,8	71,9	74,0	76,1	78,2	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	69,0	71,2	73,6	76,4	78,9	81,4	83,9	86,4	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	36,6	36,9	37,0	37,2	37,5	37,6	37,7	38,0	(±)0,5
		164-170	39,6	39,9	40,0	40,2	40,5	40,6	40,7	41,0	
		176-182	41,1	41,4	41,5	41,7	42,0	42,1	42,2	42,5	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	23,5	24,1	24,7	25,4	26,1	26,9	27,7	28,6	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	19,2	19,6	20,0	20,5	21,0	21,7	22,7	24,0	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	19,9	20,7	21,5	22,5	23,8	25,0	26,5	27,6	(±)0,5
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	18,0	18,1	19,0	19,0	19,1	19,5	20,0	20,1	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 238 из 529

В65. Блуза медицинская женская модель 309Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер; полуприлегающего силуэта, с разрезами в боковых швах; без воротника, с фигурным вырезом горловины, обработанным обтачкой.

Перед с центральной бортовой застежкой на 5 кнопок; с притачными кокетками; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа; с двумя верхними накладными карманами трапециевидной формы, передними боковыми срезами, входящими в рельефные швы на уровне линии груди; с двумя декоративными патами шириной 3,0-3,2см, вшитыми одним концом в швы притачивания кокеток, а другим концом треугольной формы пристегивающиеся на кнопку к верхним карманам; с двумя нижними накладными карманами, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы, а верхний срез имеет фигурную форму и обработан обтачкой.

Спинка с притачной кокеткой; с вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скрепленными посередине спинки с помощью кнопки. Для регулировки степени прилегания изделия по талии на правом полупоясе должны быть установлены две нижних части кнопки с расстоянием 2,5см.

Рукава втачные, одношовные, длиной 3/4 с притачными манжетами шириной 4,2-4,4см, с двумя патами шириной 3,0-3,2см, вшитыми одним концом в поперечные швы манжет посередине рукавов и пристегивающимися к манжетам на кнопку.

Декоративные паты переда и рукавов могут быть выполнены из отделочной ткани.

По кокеткам, рельефам, краям бортов, горловине, патам, верхним краям карманов, по швам настрачивания карманов и нижним краям поясов должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8см от края или шва.

По разрезам и швам притачивания манжет должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,1-1,3см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 239 из 529



Рисунок В65–Блуза медицинская женская модель 309Б

Таблица В65.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 309Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Спинка	1	0
3	Бочок полочки	2	1
4	Бочок спинки	2	1
5	Кокетка полочки	2	1
6	Кокетка спинки	1	0
7	Рукав	2	1
8	Манжета	2	1
9	Верхний карман	2	1
10	Нижний карман	2	1
11	Обтачка нижнего кармана	2	1
12	Пата	8	4
13	Полупояс	2	1
14	Подборт	2	1
15	Обтачка горловины спинки	1	0
Итого		33	15

Таблица В 65.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 309Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	66,0	66,5	67,0	67,5	68,0	68,4	68,7	69,0	(±)1,0
		164-170	70,0	70,5	71,0	71,5	72,0	72,4	72,7	73,0	
		176-182	72,0	72,5	73,0	73,5	74,0	74,4	74,7	75,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,4	42,3	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	68,4	69,3	70,1	70,9	71,7	72,6	73,4	74,2	(±)1,0
		164-170	72,4	73,3	74,1	74,9	75,7	76,6	77,4	78,2	
		176-182	74,4	75,3	76,1	76,9	77,7	78,6	79,4	80,2	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	43,6	45,7	47,8	49,9	52,0	54,1	56,2	58,3	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,7	62,7	64,6	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	40,5	40,7	40,9	41,2	41,5	41,8	42,0	42,2	(±)1,0
		164-170	43,5	43,7	43,9	44,2	44,5	44,8	45,0	45,2	
		176-182	45,0	45,2	45,4	45,7	46,0	46,3	46,5	46,7	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,3	17,8	18,4	19,0	19,6	20,3	21,0	21,6	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу	все роста	15,4	15,8	16,1	16,2	16,4	16,8	17,2	17,7	(±)0,5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	7,3	7,5	7,7	8,0	8,3	8,6	8,9	9,1	(±)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	11,2	11,4	11,5	11,6	11,8	11,9	12,0	12,2	(±)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	12,9	13,8	14,5	15,3	16,0	16,8	17,7	18,6	(±)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	18,4	18,4	18,5	18,5	18,5	18,6	18,6	18,6	(±)0,3

Продолжение Таблицы В65.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	69,3	69,5	69,7	69,9	70,1	70,3	70,5	70,7	(±)1,0
		164-170	73,3	73,5	73,7	73,9	74,1	74,3	74,5	74,7	
		176-182	75,3	75,5	75,7	75,9	76,1	76,3	76,5	76,7	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,2	44,0	44,8	45,4	46,1	46,8	47,4	48,0	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	75,0	75,8	76,6	77,4	78,2	79,1	80,0	80,9	(±)1,0
		164-170	79,0	79,8	80,6	81,4	82,2	83,1	84,0	84,9	
		176-182	81,0	81,8	82,6	83,4	84,2	85,1	86,0	86,9	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,3	62,4	64,5	66,6	68,7	70,8	72,9	75,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	66,6	68,6	70,6	72,7	74,8	76,9	79,0	81,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	42,4	42,7	42,8	42,9	43,0	43,1	43,2	43,3	(±)1,0
		164-170	45,4	45,7	45,8	45,9	46,0	46,1	46,2	46,3	
		176-182	46,9	47,2	47,3	47,4	47,5	47,6	47,7	47,8	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,3	23,1	23,9	24,7	25,5	26,2	26,8	27,5	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	18,2	18,7	19,2	19,8	20,4	20,7	21,2	21,8	(±)0,5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	9,4	9,7	10,0	10,3	10,6	10,8	11,0	11,2	(±)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,4	12,6	12,8	13,0	13,3	13,5	13,8	14,5	(±)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	19,5	20,4	21,3	19,5	19,6	19,7	19,8	20,2	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	(+/-)0,3

В66. Блуза медицинская женская модель 310Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер, полуприлегающего силуэта; со съёмным завязывающимся поясом шириной 3,7-3,8см и разрезами в боковых швах.

Перед с центральной бортовой застежкой до верха на 5 обметанных петель и 5 пуговиц (левая полочка обработана подбортом, правая – настрочной планкой шириной 3,2-3,4см); с притачными кокетками; вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа; с двумя шлевками, настроченными вдоль боковых швов на уровне линии талии; с двумя верхними накладными карманами, передние боковые срезы которых входят рельефные швы на уровне линии груди, а верхние срезы обработаны притачными планками шириной 2,9-3,0см; с двумя нижними накладными карманами с наклонным входом, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы, а верхние срезы обработаны притачными планками шириной 3,5-3,6см. В передней части нижних накладных карманов застрочены вертикальные швы, выходящие из швов притачивания планок и доходящие до низа карманов. В швы притачивания планок левого верхнего и правого нижнего карманов вшиты шлевки в виде петель, шириной 0,9-1,0см, в которые продеты декоративные металлические пряжки.

Спинка с притачной кокеткой, вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа.

Рукава втачные, одношовные, длиной до локтя. Параллельно нижнему краю рукавов застрочены двумя строчками (на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8см от края) запыпы, имитирующие отложные манжеты шириной 2,9-3,0см.

Воротник стояче-отложной, с отрезной стойкой, застегивающейся на одну пуговицу.

Стойки воротника, а также шлевки на карманах могут быть выполнены из отделочной гладкокрашеной ткани.

По краям бортов, кокеткам, рельефам, воротнику, по верхним краям и швам настрачивания верхних и нижних карманов, низу рукавов, поясу (со всех сторон), вертикальным швам нижних карманов и швам настрачивания планок верхних и нижних карманов должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8см от края или шва.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 242 из 529

По шву притачивания стойки к воротнику, шву втачивания стойки в горловину, по разрезам, краям шлевок и швам их настрачивания должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические пряжки шириной 1,0см и пластиковые пуговицы диаметром 1,3-1,5см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

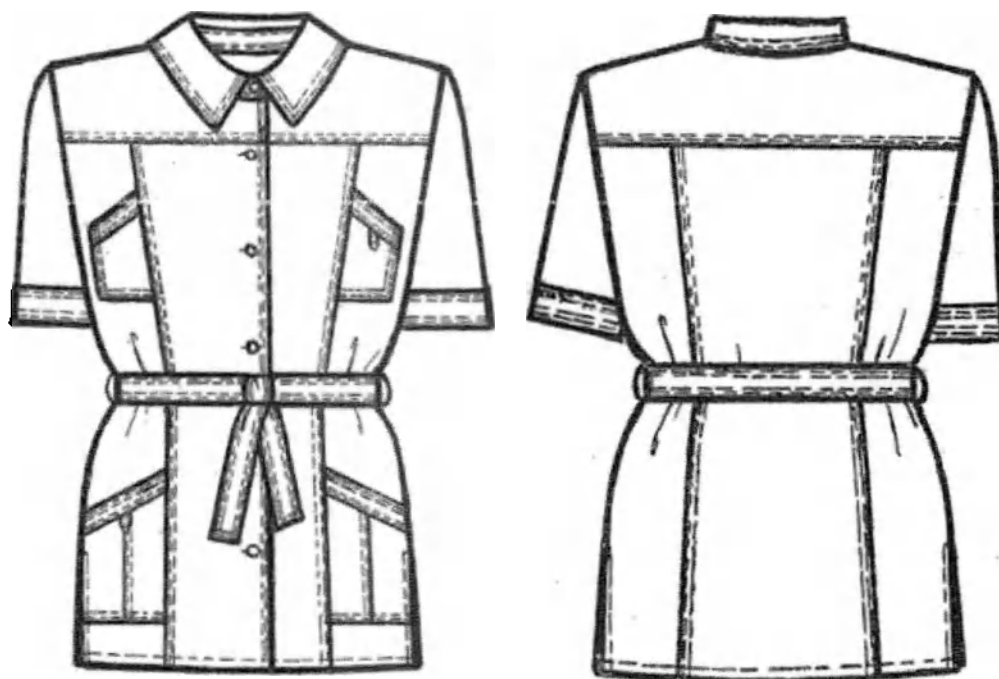


Рисунок В66–Блуза медицинская женская модель 310Б

Таблица В66.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 310Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	1	0
4	Бочок спинки	2	1
5	Кокетка полочки	2	1
6	Кокетка спинки	1	0
7	Верхний карман – 2 дет.	2	1
8	Передняя часть нижнего кармана	2	1

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
9	Задняя часть нижнего кармана	2	1
10	Планка нижнего кармана	2	1
11	Рукав	2	1
12	Воротник	2	1
13	Планка застежки	2	1
14	Пояс	2	1
15	Шлевки для пояса	1	0
Отделочная ткань			
16	Стойка воротника	2	1
17	Декоративные шлевки	1	0
Итого		30	13

Таблица В66.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 310Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	66,0	66,4	66,9	67,4	67,9	68,4	68,7	69,0	(±)1,0
		164-170	70,0	70,4	70,9	71,4	71,9	72,4	72,7	73,0	
		176-182	72,0	72,4	72,9	73,4	73,9	74,4	74,7	75,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	40,8	41,5	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	68,4	69,3	70,0	70,8	71,6	72,4	73,2	74,0	(±)1,0
		164-170	72,4	73,3	74,0	74,8	75,6	76,4	77,2	78,0	
		176-182	74,4	75,3	76,0	76,8	77,6	78,4	79,2	80,0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застежки), см	все роста	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	28,0	28,2	28,5	28,8	29,1	29,4	29,7	30,0	(±)0,5
		164-170	30,0	30,2	30,5	30,8	31,1	31,4	31,7	32,0	
		176-182	31,0	31,2	31,5	31,8	32,1	32,4	32,7	33,0	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	16,6	17,3	17,9	18,6	19,3	20,1	20,8	21,5	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,4	16,9	17,4	17,9	18,4	18,9	19,4	20,1	(±)0,5
9	Ширина верхнего кармана внизу, см	все роста	7,3	7,3	7,4	7,7	7,9	7,9	8,2	8,4	(±)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	11,5	11,7	11,7	12,0	12,2	12,3	12,5	12,7	(±)0,3
11	Ширина нижнего кармана внизу, см	все роста	15,8	16,5	17,2	17,9	18,6	19,3	20,0	20,9	(±)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	20,0	20,5	20,9	21,2	21,4	21,6	21,7	22,0	(±)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	45,2	45,7	47,6	48,2	48,8	50,4	51,3	52,0	(±)0,5

Продолжение Таблицы В66.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	69,3	69,6	69,9	70,3	70,6	70,9	71,2	71,5	(±)1,0

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
		164-170	73.3	73.6	73.9	74.3	74.6	74.9	75.2	75.5	
		176-182	75.3	75.6	75.9	76.0	76.6	76.9	77.2	77.5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	42.2	42.9	43.6	44.3	45.0	45.7	46.4	47.1	(+/-)0.5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	74.8	75.6	76.5	77.4	78.3	79.2	80.1	81.0	(+/ -)1.0
		164-170	78.8	79.6	80.5	81.4	82.3	83.2	84.1	85.0	
		176-182	80.8	81.6	82.5	83.4	84.3	85.2	86.1	87.0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60.0	62.0	64.0	66.2	68.4	70.6	72.8	75.0	(+/-)1.0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полужаноса застёжки), см	все роста	67.0	69.0	71.0	73.2	75.4	77.6	79.8	82.0	(+/-)1.0
6	Длина рукава, см	152-158	30.3	30.6	30.9	31.2	31.5	31.8	32.1	32.4	(+/ -)0.5
		164-170	32.3	32.6	32.9	33.2	33.5	33.8	34.1	34.4	
		176-182	33.3	33.6	33.9	34.2	34.5	34.8	35.1	35.4	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22.3	23.0	23.7	24.4	25.0	25.6	26.2	26.8	(+/-)0.5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	20.9	21.6	22.2	22.9	23.5	24.1	24.8	25.4	(+/-)0.5
9	Ширина верхнего кармана внизу, см	все роста	8.4	8.9	9.4	9.6	9.8	10.0	10.2	10.4	(+/-)0.3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12.7	12.9	13.1	13.1	13.1	13.2	13.3	13.4	(+/-)0.3
11	Ширина нижнего кармана внизу, см	все роста	21.8	22.6	23.5	24.3	22.4	22.7	23.0	23.2	(+/-)0.3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	22.2	22.3	22.3	22.3	22.3	22.4	22.5	22.5	(+/-)0.3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	52.8	53.3	54.2	55.1	56.0	56.9	57.8	58.7	(+/-)0.5

В67. Блуза медицинская женская модель 312Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская удлиненная (длиной до середины бедра); прямого силуэта, умеренного объема; отрезная ниже линии талии на 5см; с разрезами в боковых швах.

Перед с центральной бортовой застёжкой на 6 кнопок, с притачной планкой под застежку шириной 3,6-3,8см на правой полочке; с притачными кокетками; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до шва притачивания нижней части переда; с одним верхним накладным карманом фигурной формы, верхний край которого обработан притачной планкой шириной 2,5-2,7см; с декоративной патой шириной 3,3-3,5см, вшитой одним концом в нижний шов настрачивания верхнего кармана, а другим концом треугольной формы прикрепляющейся к полочке с помощью кнопки; с двумя нижними накладными карманами фигурной формы, верхние края которых обработаны притачными планками шириной 2,5-2,7см; с двумя дополнительными нижними карманами, настроенными на основные и входящие в швы их

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

настрачивания: правый дополнительный карман нижним срезом, а левый – передним и нижним срезами; с декоративной патой шириной 3,3-3,5см на правой полочке, вшитой одним концом в шов соединения верхней и нижней частей переда, а другим концом треугольной формы пристёгивающейся к карману на кнопку.

Спинка с притачной кокеткой; со средним швом на верхней части спинки и декоративной патой, вшитой одним концом в шов притачивания кокетки над средним швом, а другим концом треугольной формы прикрепленной к спинке с помощью кнопки.

Рукава втачные, двухшовные, с нижними и средними швами, длиной ниже локтя.

Воротник стояче – отложной, на отрезной стойке, застегивающейся на одну кнопку.

По краям бортов, кокеткам, рельефам, среднему шву спинки, шву соединения верхней и нижней частей переда и спинки, средним швам рукавов, краям воротника, пат, планок карманов, по швам настрачивания основных и дополнительных карманов, швам притачивания планок карманов и планки под застёжку должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8см от края или шва.

По разрезам, шву притачивания стойки к воротнику и шву втачивания стойки в горловину должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

По низу рукавов и низу изделия должна быть проложена строка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,1-1,3см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

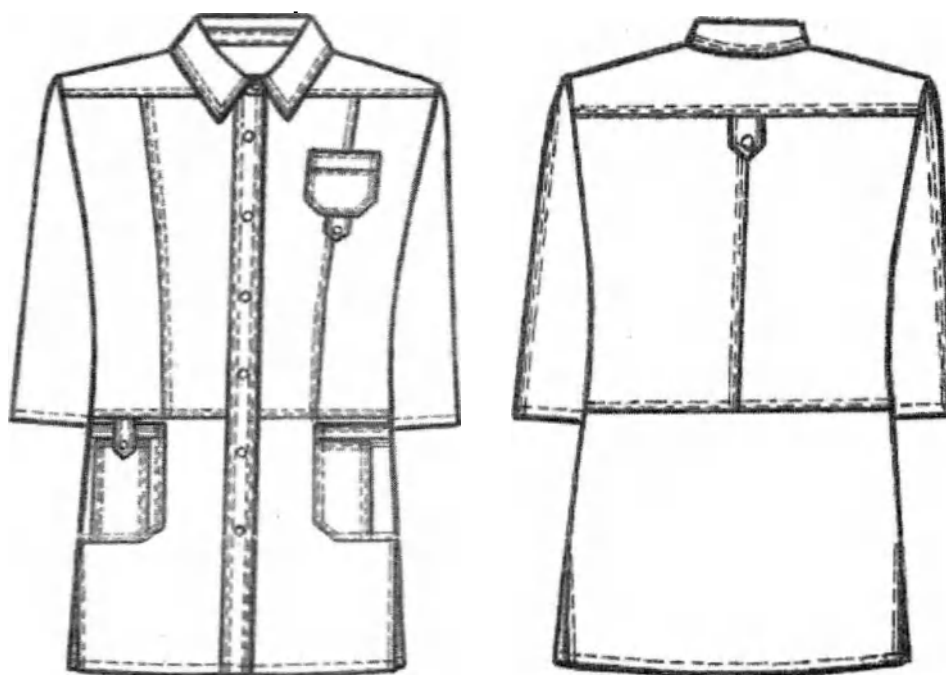


Рисунок В67–Блуза медицинская женская модель 312Б

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 246 из 529

Таблица В67.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 312Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Верхняя часть полочки	2	1
2	Бочок верхней части полочки	2	1
3	Нижняя часть полочки	2	1
4	Верхняя часть спинки	2	1
5	Нижняя часть спинки	1	0
6	Кокетка полочки	2	1
7	Кокетка спинки	1	0
8	Планка для застежки	2	1
9	Верхний карман	1	0
10	Планка верхнего кармана	1	0
11	Основной нижний карман	2	1
12	Планка нижнего кармана	2	1
13	Левый нижний карман дополнительный	1	0
14	Правый нижний карман дополнительный	1	0
15	Передняя часть рукава	2	1
16	Задняя часть рукава	2	1
17	Воротник	2	1
18	Стойка воротника	2	1
19	Пата верхняя	4	2
20	Пата нижняя	2	1
Итого		36	15

Таблица В67.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 312Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	75,7	75,8	75,9	76,0	76,2	76,5	76,7	76,7	(±)1,0
		164-170	79,7	79,8	79,9	80,0	80,2	80,5	80,7	80,7	
		176-182	81,7	81,8	81,9	82,0	82,2	82,5	82,7	82,7	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	33,8	34,8	35,7	36,6	37,5	38,4	39,3	40,1	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	76,5	77,5	78,5	80,0	81,2	82,2	83,2	83,9	(±)1,0
		164-170	80,5	81,5	82,5	84,0	85,2	86,2	87,2	87,9	
		176-182	82,5	83,5	84,5	86,0	87,2	88,2	89,2	89,9	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	45,3	47,2	49,1	51,0	52,9	54,8	56,7	58,6	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	38,6	38,8	39,1	39,3	39,9	40,1	40,6	40,8	(±)0,5
		164-170	41,6	41,8	42,1	42,3	42,9	43,1	43,6	43,8	
		176-182	43,1	43,3	43,6	43,8	44,4	44,6	45,1	45,3	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	16,7	17,4	18,0	18,7	19,5	20,3	21,0	21,6	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,0	15,5	16,1	16,6	17,1	17,6	18,0	18,5	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 247 из 529

9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	8,9	8,9	9,3	9,3	9,9	9,9	10,6	10,6	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	все роста	10,6	10,6	11,2	11,2	11,5	11,5	12,0	12,0	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	16,1	17,0	17,6	18,2	19,0	19,7	20,5	21,0	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	18,0	18,0	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0	55,0	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В67.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	76,8	77,0	77,2	77,7	78,3	78,7	79,1	79,5	(+)1,0
		164-170	80,8	81,0	81,2	81,7	82,3	82,7	83,1	83,5	
		176-182	82,8	83,0	83,2	83,7	84,3	84,7	85,1	85,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	41,0	41,9	42,8	43,6	44,4	45,0	45,6	46,2	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	84,5	85,4	86,2	87,0	88,3	89,4	90,5	91,5	(+)1,0
		164-170	88,5	89,4	90,2	91,0	92,3	93,4	94,5	95,5	
		176-182	90,5	91,4	92,2	93,0	94,3	95,4	96,5	97,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,5	62,4	64,3	66,2	68,1	70,0	71,9	73,8	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	41,2	41,4	41,7	42,0	42,5	43,0	43,3	43,6	(+)0,5
		164-170	44,2	44,4	44,7	45,0	45,5	46,0	46,3	46,6	
		176-182	45,7	45,9	46,2	46,5	47,0	47,5	47,8	48,1	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,2	22,9	23,6	24,3	25,0	25,7	26,4	27,1	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	10,6	10,6	10,6	10,6	11,0	11,0	11,5	11,5	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	все роста	12,0	12,0	12,0	12,0	12,3	12,3	12,5	12,5	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	22,0	20,3	21,2	21,8	21,8	21,8	22,2	22,2	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	18,5	18,7	18,7	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	56,0	57,0	58,0	59,0	60,2	61,5	62,5	63,5	(+/-)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 248 из 529

В68. Блуза медицинская женская модель 317Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер, полуприлегающего силуэта.

Перед с центральной бортовой застежкой на 7 кнопок; с притачными планками под застежку шириной 3,4-3,6 см; с притачными кокетками; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа; с двумя боковыми накладными карманами, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы, а верхние края обработаны притачными планками шириной 3,3-3,5 см. На левой полочке в шов притачивания кокетки вшита декоративная деталь в виде шлевки, в которую продета металлическая пряжка. На планке левой полочки, по шву её притачивания, настрочена декоративная лента.

Спинка с притачной кокеткой и вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа

Рукава втачные, одношовные, длиной 3/4, с притачными манжетами шириной 3,5-3,7 см. По центру манжета левого рукава в шов притачивания закреплена петля из декоративной ленты.

Воротник – стойка, застегивающийся на 1 кнопку.

По рельефам, кокеткам, краям воротника, планок застежки и карманов, по низу манжет, шлевке, по швам притачивания планок застежки, карманов и манжет, швам настрачивания карманов и втачивания воротника в горловину должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,0-1,2 см и металлические пряжки шириной 1,0 см и 3,0-3,5 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

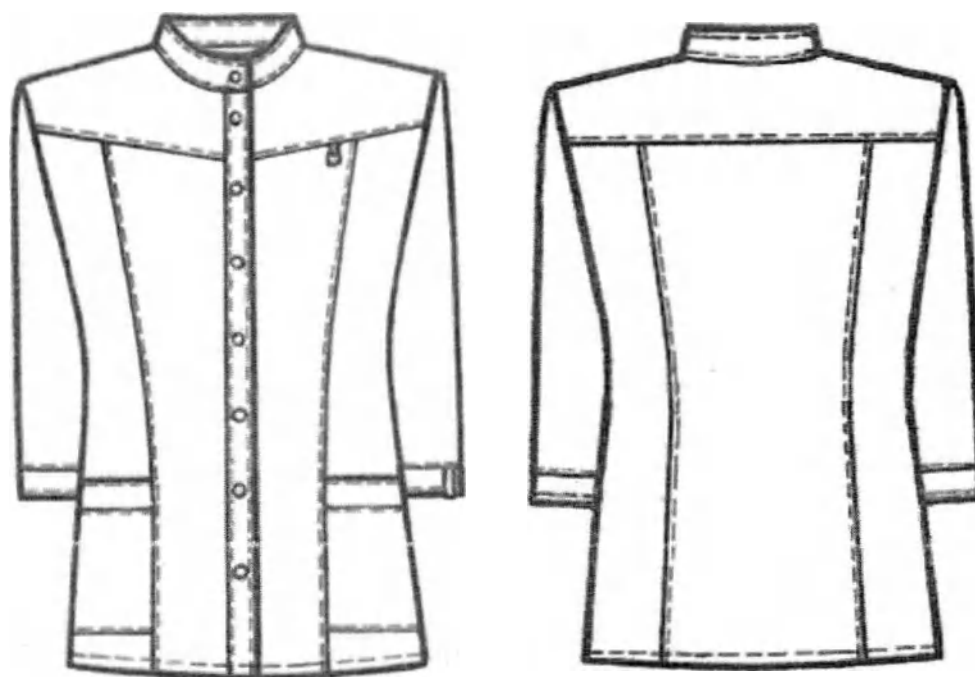


Рисунок В68–Блуза медицинская женская модель 317Б

Таблица В68.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 317Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Спинка	1	0
3	Бочок полочки	2	1
4	Бочок спинки	2	1
5	Кокетка полочки	2	1
6	Кокетка спинки	1	0
7	Планка застежки	2	1
8	Рукав	2	1
9	Манжета	2	1
10	Карман	2	1
11	Планка кармана	2	1
12	Воротник	2	1
13	Шлевка	1	0
	ИТОГО	23	10

Таблица В68.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 317Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	64,2	64,7	65,3	65,7	66,2	66,7	67,0	67,2	(±)1,0
		164-170	68,2	68,7	69,3	69,7	70,2	70,7	71,0	71,2	
		176-182	70,2	70,7	71,3	71,7	72,2	72,7	73,0	73,2	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,3	36,3	37,3	38,3	39,3	40,3	41,3	42,2	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	66,8	67,4	68,3	69,2	70,1	70,7	71,4	72,2	(±)1,0
		164-170	70,8	71,4	72,3	73,2	74,1	74,7	75,4	76,2	
		176-182	72,8	73,4	74,3	75,2	76,1	76,7	77,4	78,2	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,3	46,3	48,3	50,3	52,5	54,7	56,9	59,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	39,2	39,5	39,7	39,8	40,1	40,4	40,5	40,8	(±)1,0
		164-170	42,2	42,5	42,7	42,8	43,1	43,4	43,5	43,8	
		176-182	43,7	44,0	44,7	44,8	44,6	44,9	45,0	45,3	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,1	18,2	18,7	19,2	19,7	20,3	21,0	21,9	(±)1,0
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	17,7	(±)0,5
9	Глубина нижнего кармана, см	все роста	18,0	18,2	18,3	18,5	18,7	18,8	18,8	18,8	(±)0,3
10	Длина воротника по отлету, см	все роста	41,4	42,2	43,2	44,4	45,4	46,4	47,4	48,4	(±)0,3

Продолжение Таблицы В68.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	67,5	68,0	68,3	68,4	68,5	68,6	68,7	69,0	(±)1,0
		164-170	71,5	72,0	72,3	72,4	72,5	72,6	72,7	73,0	
		176-182	73,5	74,0	74,3	74,4	74,5	74,6	74,7	75,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,2	44,1	45,0	45,9	46,7	47,5	48,3	49,1	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	73,0	74,0	75,0	75,8	76,5	77,5	78,5	79,5	(±)1,0
		164-170	77,0	78,0	79,0	79,8	80,5	81,5	82,5	83,5	
		176-182	79,0	80,0	81,0	81,8	82,5	83,5	84,5	85,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	61,1	63,2	65,3	67,4	69,5	71,6	73,7	75,8	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	67,5	69,5	71,5	73,7	75,9	78,1	80,3	82,5	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	41,1	41,4	41,7	41,9	42,1	42,3	42,5	42,7	(±)1,0
		164-170	44,1	44,4	44,7	44,9	45,1	45,3	45,5	45,7	
		176-182	45,6	45,9	46,2	46,4	46,6	46,8	47,0	47,2	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,7	23,4	24,1	24,7	25,3	26,0	26,7	27,4	(±)1,0
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	18,0	18,4	18,7	19,2	19,7	20,4	21,0	21,6	(±)0,5
9	Глубина нижнего кармана, см	все роста	18,9	18,9	18,9	19,0	19,3	19,4	19,5	19,5	(±)0,3
10	Длина воротника по отлету, см	все роста	49,3	50,2	51,0	52,0	53,0	54,2	55,2	56,2	(±)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В69. Блуза медицинская женская модель 320Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер, полуприлегающего силуэта.

Перед с притачными кокетками; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа; с центральной застёжкой встык на тесьму-«молнию», начинающейся от швов притачивания кокеток; с двумя боковыми накладными карманами с наклонным входом, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы, а верхние срезы обработаны притачными планками шириной 1,4-1,5см. На левой полочке в шов притачивания кокетки вшита декоративная деталь в виде шлевки, в которую продета металлическая пряжка.

Спинка с притачной кокеткой; с вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скреплёнными посередине спинки при помощи двух металлических полуколец, продетых в застроченную подгибку левого полупояса.

Рукава втачные, трехшовные, с отрезными центральными частями, швы соединения которых являются продолжением швов притачивания кокеток переда и спинки; с притачными манжетами шириной 1,4-1,5см.

Воротник – стойка, шириной 1,7-1,9см.

Центральные части переда, спинки, рукавов, а также кокетки переда и спинки должны быть выполнены из основной ткани №1, остальные детали – из основной ткани №2.

По рельефам, кокеткам, краям полупоясов, воротника, планок карманов, по низу манжет, шлевке, по швам притачивания планок карманов и манжет, швам настрачивания карманов, стачивания частей рукавов, втачивания воротника в горловину и обтачивания бортов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

В качестве фурнитуры должны быть использованы разъемная тесьма-«молния», металлические полукольца шириной 3,0-3,5 и металлическая пряжка шириной 1,0см.

Нитки для изготовления изделия должны использоваться в тональном сочетании с цветом основной ткани №1 и основной ткани №2.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

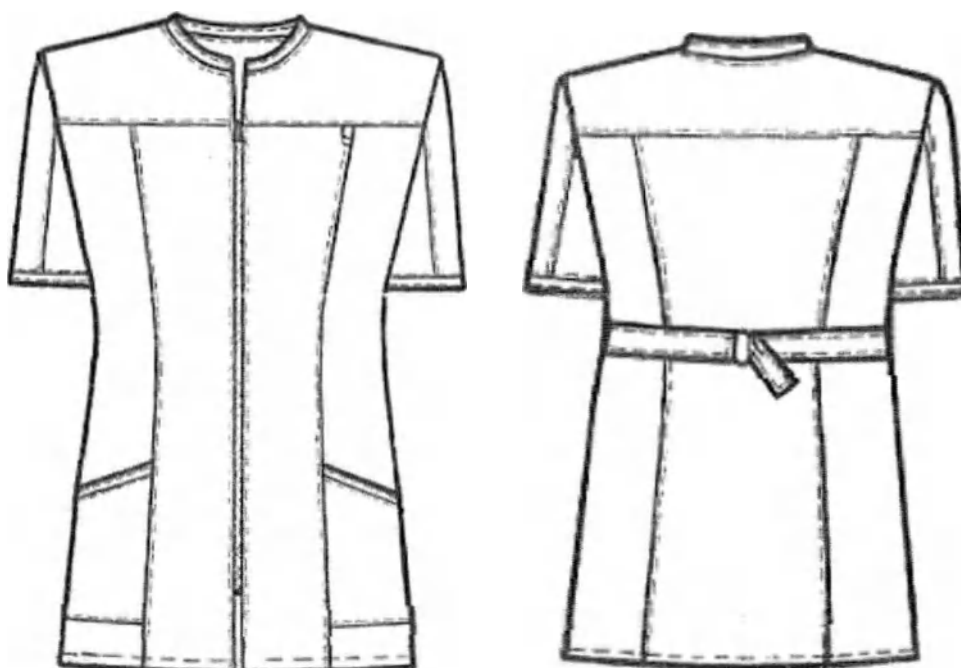


Рисунок В69–Блуза медицинская женская модель 320Б

Таблица В69.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 320Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань №1			
1	Полочка	2	1
2	Спинка	1	0
3	Кокетка полочки	2	1
4	Кокетка спинки	1	0
5	Средняя часть рукава	2	1
6	Подборт	2	1
Основная ткань №2			
7	Бочок полочки	2	1
8	Бочок спинки	2	1
9	Передняя часть рукава	2	1
10	Задняя часть рукава	2	1
11	Карман	2	1
12	Манжета	2	1
13	Планка кармана	2	1
14	Воротник	2	1
15	Левый полупояс	1	0
16	Правый полупояс	1	0
17	Обтачка горловины спинки	1	0
18	Шлевка	1	0
ИТОГО		30	12

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 253 из 529

Таблица В69.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 320Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	66,5	67,0	67,5	68,0	68,5	68,9	69,2	69,5	(+/-)1,0
		164-170	70,5	71,0	71,5	72,0	72,5	72,9	73,2	73,5	
		176-182	72,5	73,0	73,5	74,0	74,5	74,9	75,2	75,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	41,9	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	69,1	70,3	71,1	71,9	72,7	73,6	74,4	75,2	(+/-)1,0
		164-170	73,4	74,3	75,1	75,9	76,7	77,6	78,4	79,2	
		176-182	75,4	76,3	77,1	77,9	78,7	79,6	80,4	81,2	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,2	46,3	48,4	50,5	52,6	54,7	56,8	58,9	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	51,2	53,2	55,2	57,2	59,3	61,4	63,4	65,3	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	21,3	21,6	22,0	22,3	22,5	22,8	23,0	23,2	(+/-)0,5
		164-170	23,3	23,6	24,0	24,3	24,5	24,8	25,0	25,2	
		176-182	24,3	24,6	25,0	25,3	25,5	25,8	26,0	26,2	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,3	17,8	18,4	19,0	19,6	20,3	21,0	21,6	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,1	16,7	17,3	17,9	18,5	19,0	19,6	20,2	(+/-)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	13,1	13,8	14,5	15,2	15,9	16,6	17,4	18,5	(+/-)0,3
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	18,9	19,0	19,3	19,8	19,9	20,1	20,2	20,3	(+/-)0,3
11	Длина воротника по отлету, см	все роста	38,3	39,4	40,5	41,6	42,8	43,9	45,0	46,0	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В69.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	69,8	70,0	70,2	70,4	70,6	70,8	71,0	71,2	(+/-)1,0
		164-170	73,8	74,0	74,2	74,4	74,6	74,8	75,0	75,2	
		176-182	75,8	76,0	76,2	76,4	76,6	76,8	77,0	77,2	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	42,8	43,7	44,6	45,5	46,4	47,3	48,2	49,1	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	76,0	76,8	77,6	78,4	79,2	80,1	81,1	81,9	(+/-)1,0
		164-170	80,0	80,8	81,6	82,4	83,2	84,1	85,0	85,9	
		176-182	82,0	82,8	83,6	84,4	85,2	86,1	87,0	87,9	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,9	62,8	65,1	67,2	69,3	71,4	73,5	75,6	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	67,3	69,3	71,3	73,4	75,5	77,6	79,7	81,7	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	23,5	23,7	23,8	24,0	24,1	24,3	24,5	24,6	(+/-)0,5
		164-170	25,5	25,7	25,8	26,0	26,1	26,3	26,5	26,6	
		176-182	26,5	26,7	26,8	27,0	27,1	27,3	27,5	27,6	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,3	23,1	23,9	24,7	25,5	26,2	26,8	27,5	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	20,8	21,6	22,4	23,2	23,9	24,5	25,0	25,6	(+/-)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	19,6	20,4	21,2	20,0	20,1	20,3	21,0	21,2	(+/-)0,3
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	20,5	20,6	20,8	20,8	20,8	20,8	20,9	20,9	(+/-)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 254 из 529

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
11	Длина воротника по отлету, см	все роста	47,0	48,2	49,2	50,2	51,2	52,3	53,3	54,4	(+/-)0,5

В70. Блуза медицинская женская модель 321Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская из белой или гладкокрашеной ткани длиной ниже линии бедер; полуприлегающего силуэта; с разрезами в боковых швах.

Перед с отложными лацканами до линии груди; с центральной бортовой застежкой на 5 кнопок; с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с двумя фигурными клапанами, настроенными выше линии груди и прикрепленными в углах к полочкам с помощью кнопок; с двумя нижними накладными карманами, в середине которых заложены встречные складки глубиной 3 см, а верхние края обработаны притачными планками шириной 3,5-3,7 см; с двумя фигурными клапанами, настроенными над нижними карманами и пристегивающимися к ним на кнопки.

Спинка с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии. К свободным концам полупоясов пристегивается на кнопки декоративный фигурный хлястик. Для регулировки степени прилегания изделия по талии на полупоясах должны быть установлены по 2 нижние части кнопок с расстоянием 2,5 см.

Рукава втачные, одношовные, длиной до локтя. Параллельно нижнему краю рукавов застрочены двумя строчками (на расстоянии 0,1-0,2 см и 0,7-0,8 см от края) защипы, имитирующие отложные манжеты шириной 3,9-4,1 см.

Воротник отложной, «пиджачного» типа.

По рельефам, горловине переда, краям бортов, воротника, хлястика, клапанов, поясов, складок карманов, по низу рукавов, а также швам настрачивания клапанов и карманов должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 см и 0,7-0,8 см от края или шва.

По разрезам и по шву втачивания воротника в горловину спинки должна быть проложена строчки на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,1-1,3 см.

Нитки, используемые для изготовления изделия, должны быть в тональном сочетании с цветом ткани.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 255 из 529

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.



Рисунок В70–Блуза медицинская женская модель 321Б

Таблица В70.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 321Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Спинка	1	0
3	Бочок полочки	2	1
4	Бочок спинки	2	1
5	Рукав	2	1
6	Воротник	2	1
7	Верхний клапан	4	2
8	Нижний клапан	4	2
9	Нижний карман	2	1
10	Планка кармана	2	1
11	Полупояс	2	1
12	Хлястик	2	1
13	Подборт	2	1
	ИТОГО	29	14

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 256 из 529

Таблица В70.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 321Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	70,0	70,5	71,1	71,5	72,0	72,5	72,8	73,0	(±)1,0
		164-170	74,0	74,5	75,1	75,5	76,0	76,5	76,8	77,0	
		176-182	76,0	76,5	77,1	77,5	78,0	78,5	78,8	79,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,3	36,3	37,3	38,3	39,3	40,3	41,3	42,3	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	72,6	73,2	74,1	75,0	75,9	76,5	77,2	78,0	(±)1,0
		164-170	76,6	77,2	78,1	79,0	79,9	80,5	81,2	82,0	
		176-182	78,6	79,2	80,1	81,0	81,9	82,5	83,2	84,0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,6	46,7	48,8	50,9	53,0	55,1	57,2	59,3	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	51,6	53,7	55,8	57,9	60,0	62,1	64,2	66,3	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	25,3	25,4	25,7	26,2	26,5	26,8	27,3	27,9	(±)0,5
		164-170	27,3	27,4	27,7	28,2	28,5	28,8	29,3	29,9	
		176-182	28,3	28,4	28,7	29,2	29,5	29,8	30,3	30,9	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,2	17,8	18,3	19,0	19,6	20,3	20,8	21,6	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,0	16,5	16,9	17,5	17,9	18,5	19,0	19,5	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	15,5	15,5	16,3	16,3	17,3	17,8	17,8	18,2	(±)0,3
10	Глубина нижнего кармана посередине, см	все роста	16,6	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2	17,4	17,6	(±)0,3
11	Длина воротника по отлету, см	все роста	43,2	44,2	45,3	46,4	47,6	48,8	49,8	50,8	(±)0,5

Продолжение Таблицы В70.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	73,3	73,8	74,2	74,2	74,3	74,4	74,5	74,8	(±)1,0
		164-170	77,3	77,8	78,2	78,2	78,3	78,4	78,5	78,8	
		176-182	79,3	79,8	80,2	80,2	80,3	80,4	80,5	80,8	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,3	44,1	44,7	45,5	46,2	46,8	47,4	48,1	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	78,8	79,8	80,8	81,8	82,4	83,4	84,4	85,4	(±)1,0
		164-170	82,8	83,8	84,8	85,8	86,4	87,4	88,4	89,4	
		176-182	84,8	85,8	86,8	87,8	88,4	89,4	90,4	91,4	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	61,3	63,4	65,5	67,6	69,7	71,8	73,9	76,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	68,4	70,6	72,8	75,0	77,2	79,4	81,6	83,8	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	28,8	29,1	29,4	29,7	30,1	30,2	30,4	31,0	(±)0,5
		164-170	30,8	31,1	31,4	31,7	32,1	32,2	32,4	33,0	
		176-182	31,8	32,1	32,4	32,7	33,1	33,2	33,4	34,0	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,5	23,3	24,0	24,7	25,5	26,1	26,7	27,4	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	20,2	20,7	21,6	22,3	23,0	23,6	24,0	24,5	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	18,7	19,3	19,8	20,3	20,7	21,3	21,8	22,4	(±)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоцветного использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 257 из 529

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
10	Глубина нижнего кармана посередине, см	все роста	17,6	18,1	18,1	18,1	18,6	19,0	19,0	19,1	(+/-)0,3
11	Длина воротника по отлету, см	все роста	51,8	52,7	53,6	55,0	56,0	57,0	58,0	59,2	(+/-)0,5

В71. Блуза медицинская женская модель 325Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер, полуприлегающего силуэта.

Перед с комбинированной бортовой застёжкой: от линии груди до низа изделия – центральная, на 4 кнопки, выше линии груди – смещённая, на одну кнопку; с притачными кокетками, с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа; с двумя косыми подрезами, выходящими из нижней части пройм и заканчивающимися в рельефных швах ниже талии; с двумя верхними накладными карманами, передним срезом входящими в рельефные швы на уровне линии груди; с двумя нижними накладными карманами с наклонным входом, передние срезы которых входят в швы подрезов и в рельефные швы, задние срезы входят в боковые швы, а верхние края обработаны притачными планками шириной 4,0 – 4,2см.

Спинка с притачной кокеткой; с вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с двумя косыми подрезами, выходящими из нижней части пройм и заканчивающимися в рельефных швах ниже линии талии; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скреплёнными посередине спинки с помощью кнопки. Для регулировки степени прилегания изделия по талии на правом полупоясе должны быть установлены две нижних части кнопки с расстоянием 2,5см.

Рукава втачные, одношовные, длиной 3/4, с притачными манжетами шириной 4,2 – 4,4см.

Воротник – стойка. Спереди правый конец стойки запахивается на левую полочку и прикрепляется к ней с помощью кнопки.

По краям бортов, полупоясов, воротнику, кокеткам, рельефам, подрезам, швам притачивания планок карманов и манжет, швам втачивания воротника в горловину и настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1 – 0,2см от края или шва.

По линиям входа верхних карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,4 – 1,6см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3 – 1,5см от края.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,1 – 1,3см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

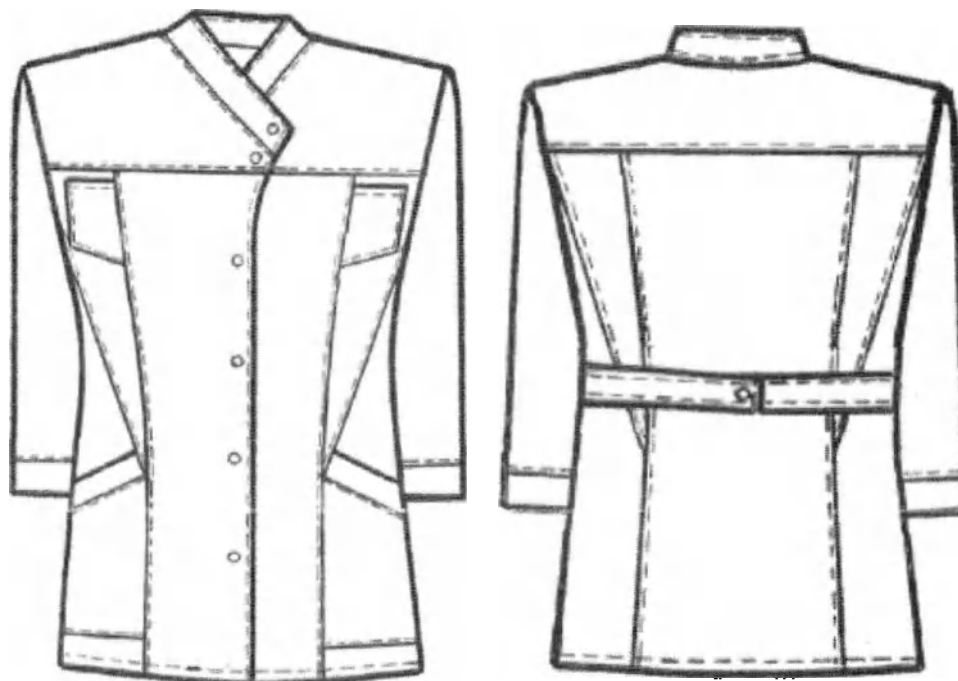


Рисунок В71–Блуза медицинская женская модель 325Б

Таблица В71.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 325Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Верхняя часть бочка полочки	2	1
4	Спинка	1	0
5	Бочок спинки	2	1
6	Верхняя часть бочка спинки	2	1
7	Кокетка полочки	2	1
8	Кокетка спинки	1	0
9	Рукав	2	1
10	Манжета	2	1
11	Верхний карман	2	1
12	Нижний карман	2	1
13	Планка кармана	2	1

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

14	Воротник	2	1
15	Полупояс	2	1
16	Подборт	2	1
	ИТОГО	30	14

Таблица В71.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 325Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	63,0	63,5	64,0	64,5	65,0	65,5	65,8	66,0	(±)1,0
		164-170	67,0	67,5	68,0	68,5	69,0	69,5	69,8	70,0	
		176-182	69,0	69,5	70,0	70,5	71,0	71,5	71,8	72,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	34,8	35,7	36,6	37,6	38,6	39,6	40,6	41,6	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	67,0	67,8	68,6	69,4	70,2	71,0	71,7	72,3	(±)1,0
		164-170	71,0	71,8	72,6	73,4	74,2	75,0	75,7	76,3	
		176-182	73,0	73,8	74,6	75,4	76,2	77,0	77,7	78,3	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	43,0	45,0	47,1	49,2	51,3	53,5	55,6	57,8	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	50,0	52,0	54,0	56,1	58,2	60,3	62,4	64,5	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	41,2	41,4	41,7	41,9	42,2	42,4	42,6	42,8	(±)1,0
		164-170	44,2	44,4	44,7	44,9	45,2	45,4	45,6	45,8	
		176-182	45,7	45,9	46,2	46,4	46,7	46,9	47,1	47,3	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	16,8	17,5	18,1	18,7	19,4	20,2	21,0	21,8	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,4	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,5	(±)0,5
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	5,6	5,6	5,8	5,8	60,0	6,4	6,5	6,6	(±)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	11,2	11,4	11,6	11,8	11,9	12,1	12,2	12,4	(±)0,3
11	Ширина нижнего кармана внизу, см	все роста	15,2	16,1	17,0	17,7	18,4	19,0	19,8	20,7	(±)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	152-158	18,5	18,6	18,8	19,1	19,3	19,5	19,5	19,5	(±)0,3
		164-170	20,5	20,6	20,7	21,1	21,3	21,5	21,5	21,5	
		176-182	20,5	20,6	20,7	21,1	21,3	21,5	21,5	21,5	
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	61,0	62,0	63,2	64,5	65,8	67,2	68,4	69,6	(±)0,5

Продолжение Таблицы В71.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	66,2	66,5	66,7	66,8	67,0	67,1	67,3	67,5	(±)1,0
		164-170	70,2	70,5	70,7	70,8	71,0	71,1	71,3	71,5	
		176-182	72,0	72,5	72,7	72,8	73,0	73,1	73,3	73,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	42,5	43,5	44,5	45,3	46,1	47,0	47,8	48,6	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	73,0	73,8	74,7	75,6	76,5	77,3	78,2	79,0	(±)1,0
		164-170	77,0	77,8	78,7	79,6	80,5	81,3	82,2	83,0	
		176-182	79,0	79,8	80,7	81,6	82,5	83,3	84,2	85,0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	59,9	61,0	64,1	66,2	68,3	70,4	72,5	74,6	(±)1,0

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 260 из 529

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	66,6	68,7	70,8	72,9	75,0	77,1	79,2	81,3	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	42,9	43,0	43,2	43,5	43,8	44,0	44,2	44,4	(±)1,0
		164-170	45,9	46,0	46,2	46,5	46,8	47,0	47,2	47,4	
		176-182	47,4	47,5	47,7	48,0	48,3	48,5	48,7	48,9	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,5	23,3	24,0	24,7	25,4	26,0	26,7	27,3	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	18,0	18,5	19,0	19,4	19,8	20,3	20,8	21,2	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	6,7	7,0	7,3	7,4	7,4	7,4	7,5	7,6	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,6	12,7	12,9	13,1	13,3	13,5	13,8	14,2	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана внизу, см	все роста	21,6	22,4	21,2	21,3	22,0	22,5	22,5	22,6	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	152-158	19,5	19,5	19,5	19,7	19,8	19,9	20,0	20,1	(±)0,3
		164-170	21,5	21,5	21,5	21,7	21,8	21,9	22,0	22,1	
		176-182	21,5	21,5	21,5	21,7	21,8	21,9	22,0	22,1	
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	70,8	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0	77,0	78,0	(+/-)0,5

В72. Блуза медицинская женская модель 329Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер; прямого силуэта, умеренного объема; без воротника, с овальным вырезом горловины, обработанным обтачкой; с разрезами в боковых швах.

Перед с притачной кокеткой на уровне линии груди; с двумя нижними накладными карманами фигурной формы, задние боковые срезы которых входят в боковые швы. Линии входа в карманы дугообразные и обработаны обтачками.

Спинка со средним швом.

Рукава втачные, одношовные, короткие (длиной выше локтя).

По горловине, кокетке, верхним краям карманов и швам их настрачивания должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8см от края.

По разрезам должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края.

По низу рукавов и низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

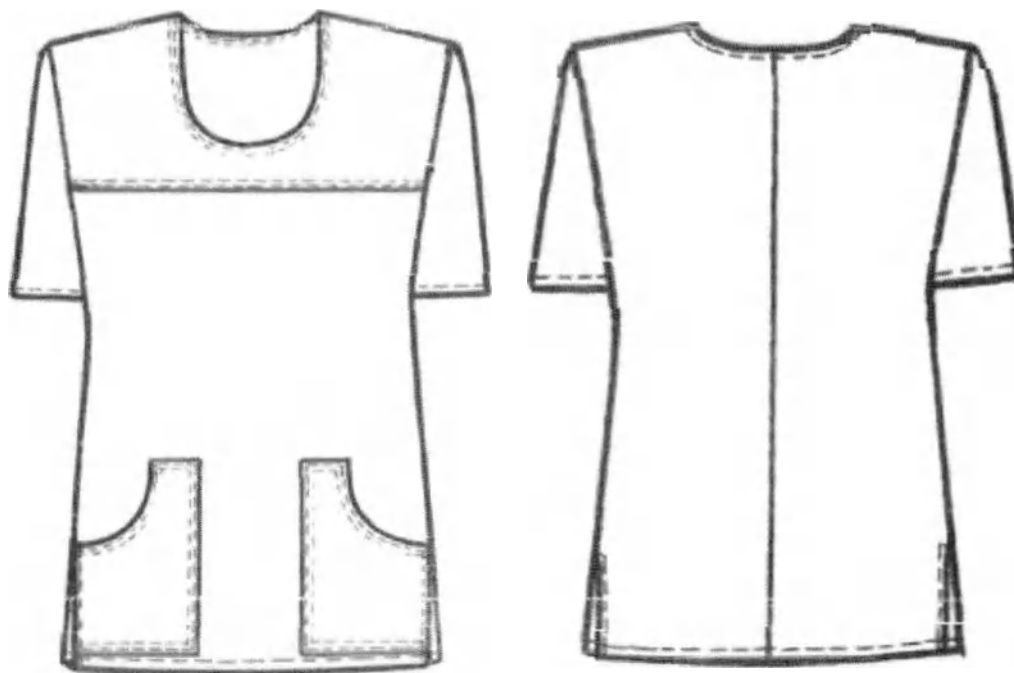


Рисунок В72–Блуза медицинская женская модель 329

Таблица В72.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 329Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Перед	1	0
2	Спинка	2	1
3	Кокетка переда	1	0
4	Рукав	2	1
5	Карман	2	1
6	Обтачка горловины переда	1	0
7	Обтачка горловины спинки	1	0
8	Обтачка кармана	2	1
ИТОГО		12	4

Таблица В72.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 329Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	65.6	65.7	65.8	65.9	66.3	66.7	66.9	67.1	(±)1.0
		164-170	69.6	69.7	69.8	69.9	70.3	70.7	70.9	71.1	
		176-182	71.6	71.7	71.8	71.9	72.3	72.7	72.9	73.1	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35.0	36.0	37.0	37.9	38.8	39.7	40.5	41.3	(±)0.5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	68.5	68.9	69.3	69.7	70.4	71.3	71.8	72.7	(±)1.0
		164-170	72.5	72.9	73.3	73.7	74.4	75.3	75.8	76.7	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

		176-182	74,5	74,9	75,3	75,7	76,4	77,3	77,8	78,7	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	22,0 24,0 25,0	22,1 24,1 25,1	22,2 24,2 25,2	22,2 24,2 25,2	22,4 24,4 25,4	22,7 24,7 25,7	23,1 25,1 26,1	23,2 25,2 26,2	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	16,5	17,2	18,1	18,9	19,6	20,3	21,0	21,7	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,0	16,5	17,1	17,7	18,3	19,0	19,6	20,3	(+/-)0,5
9	Ширина нижнего кармана внизу, см	все роста	19,2	20,4	20,5	21,7	21,7	21,7	22,0	22,0	(+/-)0,3
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	24,8	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	(+/-)0,3

Продолжение Таблицы В72.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	67,3 71,3 73,3	67,9 71,9 73,9	68,5 72,5 74,5	68,9 72,9 74,9	69,2 73,2 75,2	69,8 73,8 75,8	70,2 74,2 76,2	70,5 74,5 76,5	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	42,0	42,7	43,5	44,2	44,9	45,5	46,2	47,0	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	73,4 77,4 79,4	74,5 78,5 80,5	75,5 79,5 81,5	76,5 80,5 82,5	77,5 81,5 83,5	78,7 82,7 84,7	79,8 83,8 85,8	81,3 85,3 87,3	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	62,5	64,5	66,5	68,7	70,9	73,1	75,3	77,5	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	65,0	67,0	69,0	71,2	73,4	75,7	78,0	80,5	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	23,2 25,2 26,2	23,5 25,5 26,5	23,7 25,7 26,7	24,0 26,0 27,0	24,1 26,1 27,1	24,4 26,4 27,4	24,9 26,9 27,9	25,5 27,5 28,5	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,3	23,0	23,7	24,5	25,4	26,3	27,3	28,3	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	21,0	21,7	22,5	23,3	24,2	25,0	26,0	27,0	(+/-)0,5
9	Ширина нижнего кармана внизу, см	все роста	22,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	23,5	23,5	(+/-)0,3
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	(+/-)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 263 из 529

В73. Блуза медицинская женская модель 330Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер; прямого силуэта, умеренного объема; без воротника, с фигурным вырезом горловины, обработанным обтачкой; с разрезами в боковых швах.

Перед с притачной кокеткой на уровне линии груди, состоящей из двух запахивающихся частей (правая поверх левой), с тремя декоративными кнопками на правой детали кокетки; с двумя боковыми накладными карманами, задние срезы которых входят в боковые швы, а верхние края дугообразной формы и обработаны обтачками.

По горловине переда и верхним краям карманов может быть проложен кант с наполнителем. Ширина канта в готовом виде должна составлять 0,3-0,4см.

Спинка со средним швом.

Рукава втачные, одношовные, короткие (длиной выше локтя).

Кокетка переда и карманы могут быть выполнены из отделочной ткани.

По кокетке, горловине, разрезам, верхним краям карманов и швам их настрачивания должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

По низу рукавов и низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,0-1,2см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

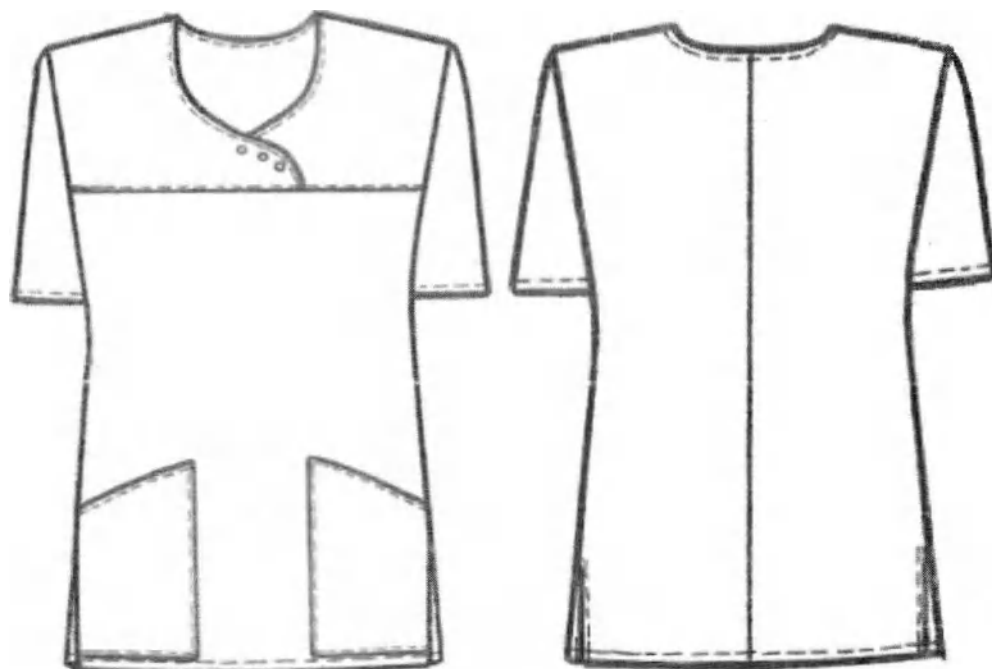


Рисунок В73–Блуза медицинская женская модель 330Б

Таблица В73.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 330Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Перед	1	0
2	Спинка	2	1
3	Рукав	2	1
4	Обтачка горловины спинки	1	0
Отделочная ткань			
6	Кокетка переда	2	1
7	Карман	2	1
8	Обтачка горловины переда	2	1
9	Обтачка кармана	2	1
ИТОГО		14	6

Таблица В73.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 330Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	65.6	65.7	65.8	65.9	66.3	66.7	66.9	67.1	(±)1.0
		164-170	69.6	69.7	69.8	69.9	70.3	70.7	70.9	71.1	
		176-182	71.6	71.7	71.8	71.9	72.3	72.7	72.9	73.1	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35.0	36.0	37.0	37.9	38.8	39.7	40.5	41.3	(±)0.5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	68.3	68.7	69.1	69.5	70.2	71.0	71.6	72.4	(±)1.0
		164-170	72.3	72.7	73.1	73.5	74.2	75.0	75.6	76.4	
		176-182	74.3	74.7	75.1	75.5	76.2	77.0	77.6	79.1	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA⁴ по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	22,0 24,0 25,0	22,1 24,1 25,1	22,2 24,2 25,2	22,2 24,2 25,2	22,4 24,4 25,4	22,7 24,7 25,7	23,1 25,1 26,1	23,2 25,2 26,2	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	16,5	17,2	18,1	18,9	19,6	20,3	21,0	21,7	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,0	16,5	17,1	17,7	18,3	19,0	19,6	20,3	(+/-)0,5
9	Ширина нижнего кармана внизу, см	все роста	19,2	20,4	20,5	21,7	21,7	21,7	22,0	22,0	(+/-)0,3
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	24,8	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	(+/-)0,3

Продолжение Таблицы В73.2

Продолжение Таблицы Б.5.2											
№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	67,3 71,3 73,3	67,9 71,9 73,9	68,5 72,5 74,5	68,9 72,9 74,9	69,2 73,2 75,2	69,8 73,8 75,8	70,2 74,2 76,2	70,5 74,5 76,5	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	42,0	42,7	43,5	44,2	44,9	45,5	46,2	47,0	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	73,1 77,1 79,1	74,2 78,2 80,2	75,2 79,2 81,2	76,2 80,2 82,2	77,2 81,2 83,2	78,5 82,5 84,5	79,5 83,5 85,5	81,0 85,0 87,0	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	62,5	64,5	66,5	68,7	70,9	73,1	75,3	77,5	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	65,0	67,0	69,0	71,2	73,4	75,7	78,0	80,5	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	23,2 25,2 26,2	23,5 25,5 26,5	23,7 25,7 26,7	24,0 26,0 27,0	24,1 26,1 27,1	24,4 26,4 27,4	24,9 26,9 27,9	25,5 27,5 28,5	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,3	23,0	23,7	24,5	25,4	26,3	27,3	28,3	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	21,0	21,7	22,5	23,3	24,2	25,0	26,0	27,0	(+/-)0,5
9	Ширина нижнего кармана внизу, см	все роста	22,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	23,5	23,5	(+/-)0,3
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	(+/-)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 266 из 529

В74. Блуза медицинская женская модель 332Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер, прямого силуэта, умеренного объема, без воротника, с фигурным вырезом горловины, обработанным обтачкой; с разрезами в боковых швах.

Перед с отрезной кокеткой, шов притачивания которой проходит через линию груди; с косым подрезом из нижнего угла горловины, имитирующим запах правой части кокетки на левую с двумя нижними накладными карманами прямоугольной формы, задние срезы которых входят в боковые швы.

Спинка со средним швом и эластичной тесьмой шириной 4,0 см, настроенной с внутренней стороны по линии талии тремя параллельными строчками с расстоянием между ними 1,8-1,9 см.

Рукава втачные, одношовные, короткие, длиной выше локтя.

По горловине, подрезам, шву притачивания кокетки, боковым разрезам и швам настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По верхним краям карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,0-2,2 см от края.

По низу изделия и низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

Нитки должны использоваться в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

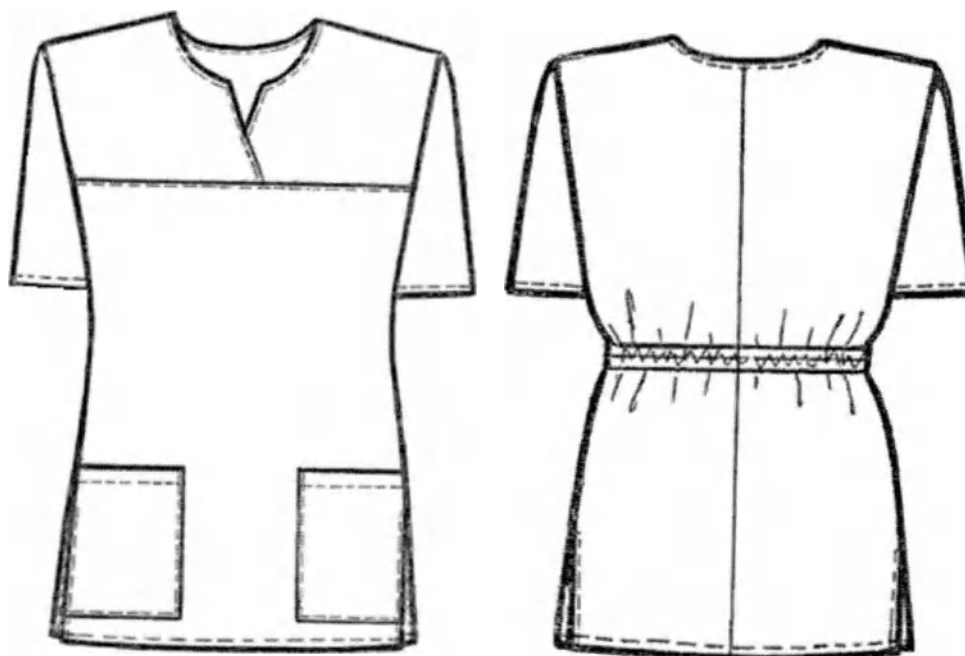


Рисунок В74—Блуза медицинская женская модель 332Б

Таблица В74.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 332Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Перед	1	0
2	Левая кокетка переда	1	0
3	Правая кокетка переда	1	0
4	Спинка	2	1
5	Рукав	2	1
6	Карман	2	1
7	Обтачка горловины левой кокетки переда	1	0
8	Обтачка горловины правой кокетки переда	1	0
9	Обтачка горловины спинки	1	0
	ИТОГО	12	3

Таблица В74.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 332Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	65,6	65,7	65,8	65,9	66,3	66,7	66,9	67,1	(±)1,0
		164-170	69,6	69,7	69,8	69,9	70,3	70,7	70,9	71,1	
		176-182	71,6	71,7	71,8	71,9	72,3	72,7	72,9	73,1	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,5	36,5	37,5	38,4	39,3	40,2	41,0	41,8	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	69,8	70,4	71,0	71,4	72,0	72,8	73,3	74,1	(±)1,0
		164-170	73,8	74,4	75,0	75,4	76,0	76,8	77,3	78,1	
		176-182	75,8	76,4	77,0	77,4	78,0	78,8	79,3	80,1	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	22,0	22,1	22,2	22,2	22,4	22,7	23,1	23,2	(±)0,5
		164-170	24,0	24,1	24,2	24,2	24,4	24,7	25,1	25,2	
		176-182	25,0	25,1	25,2	25,2	25,4	25,7	26,1	26,2	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,0	17,6	18,4	19,3	19,9	20,5	21,1	21,8	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,4	17,0	17,6	18,2	18,8	19,3	19,9	20,5	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	(±)0,5
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	19,0	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3	(±)0,5

Продолжение Таблицы В74.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	67,3	67,9	68,5	68,9	69,2	69,8	70,2	70,5	(±)1,0
		164-170	71,3	71,9	72,5	72,9	73,2	73,8	74,2	74,5	
		176-182	73,3	73,9	74,5	74,9	75,2	75,8	76,2	76,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	42,5	43,2	44,0	44,7	45,4	46,0	46,7	47,5	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	74,9	75,9	76,9	77,9	78,9	80,1	81,2	82,5	(±)1,0
		164-170	78,9	79,9	80,9	81,9	82,9	84,1	85,2	86,5	
		176-182	80,9	81,9	82,9	83,9	84,9	86,1	87,2	88,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	63,0	65,0	67,0	69,2	71,4	73,6	75,8	78,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	65,5	67,5	69,5	71,7	73,9	76,2	78,5	81,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	23,3	23,5	23,7	24,0	24,1	24,4	24,9	25,5	(±)0,5
		164-170	25,3	25,5	25,7	26,0	26,1	26,4	26,9	27,5	
		176-182	26,3	26,5	26,7	27,0	27,1	27,4	27,9	28,5	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,4	23,1	23,8	24,6	25,5	26,4	27,4	28,4	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	21,2	21,9	22,7	23,5	24,4	25,2	26,2	27,2	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	20,8	21,0	21,5	21,8	22,0	22,5	22,8	23,0	(±)0,5
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	19,3	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,6	19,6	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 269 из 529

В75. Блуза медицинская женская модель 334Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер; умеренного объема. Перед короче спинки на 3,0 см, в боковых швах разрезы. Горловина V-образной формы обработана на спинке обтачкой, а на переде – притачными планками шириной 2,8 – 3,0 см.

Перед с отрезной кокеткой, в шов притачивания которой входят концы планок горловины; с вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с двумя верхними накладными карманами трапециевидной формы, расположенными на 1,0 см ниже шва притачивания кокетки и входящими передними срезами в рельефные швы; с двумя нижними накладными карманами, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы. Верхние края карманов обработаны планками шириной 2,8-3,0 см.

Спинка с притачной кокеткой и средним швом.

Рукава втачные, одношовные, длиной выше локтя.

По рельефам, кокеткам, швам притачивания планок и швам настрачивания карманов проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1 и 0,7 см от края.

По горловине переда и спинки, краям разрезов и планок проложена строчка на расстоянии 0,1 см.

По низу изделия и низу рукавов проложена строчка на расстоянии 1,5 от края.

Для изготовления изделия используются нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

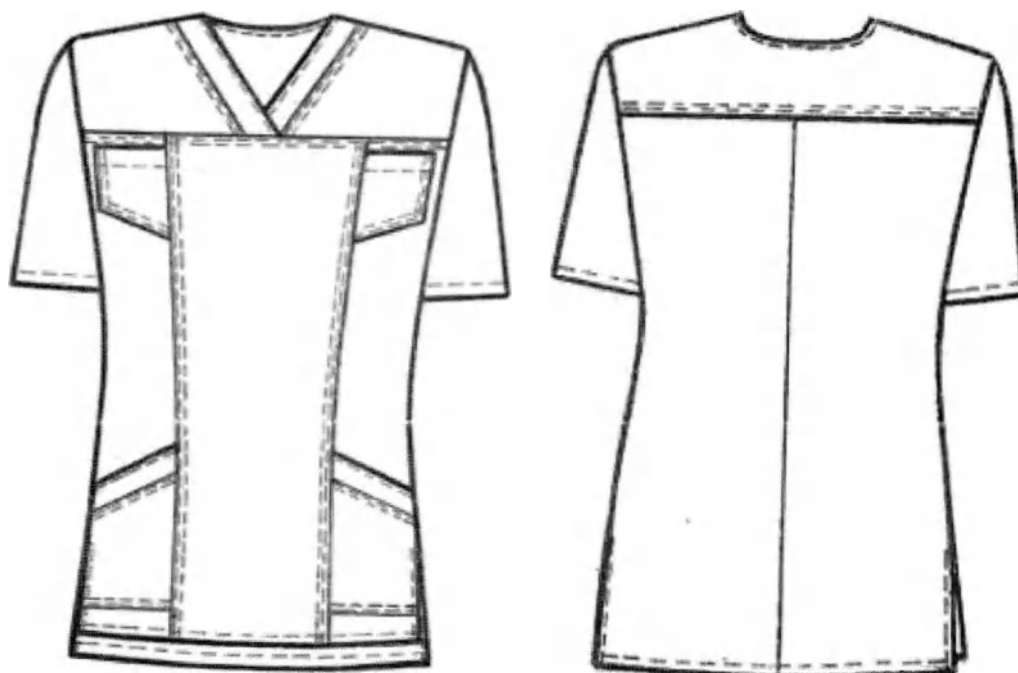


Рисунок В75–Блуза медицинская женская модель 334Б

Таблица В75.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 334Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Центральная часть переда	1	0
2	Бочок переда	2	1
3	Кокетка переда	2	1
4	Спинка	2	1
5	Кокетка спинки	1	0
6	Рукав	2	1
7	Верхний карман	2	1
8	Нижний карман	2	1
9	Планка горловины	2	1
10	Планка кармана	2	1
11	Обтачка горловины спинки	1	0
	ИТОГО	19	8

Таблица В75.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 334Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	68,1 72,1 74,1	68,2 72,2 74,2	68,3 72,3 74,3	68,4 72,4 74,4	68,8 72,8 74,8	69,2 73,2 75,2	69,4 73,4 75,4	69,6 73,6 75,6	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	34,7	35,7	36,7	37,6	38,5	39,4	40,2	41,0	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	68,8 72,8 74,8	69,5 73,5 75,5	70,0 74,0 76,0	70,5 74,5 76,5	71,2 75,2 77,2	72,4 76,4 78,4	73,0 77,0 79,0	73,8 77,8 79,8	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	(+/-1)
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	21,8 23,8 24,8	21,9 23,9 24,9	22,0 24,0 25,0	22,0 24,0 25,0	22,2 24,2 25,2	22,5 24,5 25,5	22,9 24,9 25,9	23,0 25,0 26,0	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,2	17,8	18,6	19,5	20,1	20,7	21,3	22,0	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,3	16,9	17,5	18,1	18,7	19,2	19,8	20,4	(+/-0,5)
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	7,1	7,3	7,4	7,5	7,6	7,8	7,9	8,0	(+/-0,3)
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	11,3	11,4	11,5	11,6	11,6	11,7	11,8	11,9	(+/-0,3)
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	15,1	15,8	16,5	17,3	18,2	19,0	19,8	20,5	(+/-0,3)
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	19,0	19,0	19,5	19,5	19,5	19,5	20,0	20,0	(+/-0,3)

Продолжение Таблицы В75.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	69,8 73,8 75,8	70,4 74,4 76,4	71,0 75,0 77,0	71,4 75,4 77,4	71,7 75,7 77,7	72,3 76,3 78,3	72,7 76,7 78,7	73,0 77,0 79,0	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	41,7	42,4	43,2	43,9	44,7	45,3	45,9	46,7	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	74,6 78,6 80,6	75,6 79,6 81,6	76,6 80,6 82,6	77,6 81,6 83,6	78,6 82,6 84,6	79,7 83,7 85,7	80,6 84,6 86,6	82,0 86,0 88,0	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	62,0	64,0	66,0	68,2	70,4	72,6	74,8	77,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	65,5	67,5	69,5	71,7	73,9	76,2	78,5	81,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	23,1 25,1 26,1	23,3 25,3 26,3	23,5 25,5 26,5	23,8 25,8 26,8	23,9 25,9 26,9	24,2 26,2 27,2	24,7 26,7 27,7	25,3 27,3 28,3	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,6	23,3	24,0	24,8	25,7	26,6	27,6	28,6	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	21,1	21,8	22,6	23,4	24,3	25,1	26,1	27,1	(+/-0,5)
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	8,2	8,3	8,5	8,6	8,7	8,9	9,1	9,3	(+/-0,3)
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,0	12,0	12,1	12,2	12,2	12,3	12,4	12,5	(+/-0,3)
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	21,5	22,3	23,0	21,4	21,5	21,6	21,7	21,8	(+/-0,3)
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	20,0	20,0	20,5	20,5	20,5	21,0	21,0	21,0	(+/-0,3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 272 из 529

В76. Блуза медицинская женская модель 335Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной до линии бедер; полуприлегающего силуэта, с фигурной линией низа.

Перед с центральной бортовой застёжкой на 6 обметанных петель и 6 пуговиц или на 6 кнопок; с отрезными кокетками; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа; с двумя верхними накладными карманами фигурной формы. Левая полочка обработана подбортом, правая – настрочной планкой шириной 3,2-3,4см.

Спинка с отрезной кокеткой, вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа.

Рукава втачные одношовные, короткие, длиной выше локтя, с притачными отложными манжетами шириной 3,9-4,1см и декоративными патами шириной 2,9-3,1см, вшитыми одним концом в швы притачивания манжет посередине рукавов, а другим концом треугольной формы прикрепляющимися к рукавам с помощью пуговиц или кнопок.

Воротник стояче – отложной, на отрезной стойке, застегивающейся на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу или 1 кнопку.

На левой полочке вдоль края борта должна быть проложена строчка на расстоянии 3,0-3,2см.

По краям бортов, пат, воротника, швам притачивания кокеток, воротника, стойки, а также швам настрачивания планки правой полочки и карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

По верху карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,9-2,1см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 0,7-0,9см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться пуговицы диаметром 1,2-1,4см или металлические кнопки диаметром 1,1 - 1,3см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.



Рисунок В76—Блуза медицинская женская модель 335Б

Таблица В76.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 335Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Спинка	1	0
3	Бочок полочки	2	1
4	Бочок спинки	2	1
5	Кокетка полочки	2	1
6	Кокетка спинки	1	0
7	Рукав	2	1
8	Планка под застежку	2	1
9	Карман	2	1
10	Воротник	2	1
11	Стойка воротника	2	1
12	Манжета	2	1
13	Пата	4	2
	ИТОГО	26	12

Таблица В76.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 335Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	61.5	61.2	61.7	62.3	62.9	63.2	63.6	64.0	(±)1,0
		164-170	64.5	65.2	65.7	66.3	66.9	67.2	67.6	68.0	
		176-182	66.5	67.2	67.7	68.3	68.9	69.2	69.6	70.0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	40.8	41.7	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 274 из 529

3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	63,0 67,0 69,0	63,8 67,8 69,8	64,8 68,8 70,8	65,6 69,6 71,6	67,1 71,1 73,1	67,8 71,8 73,8	68,6 72,6 74,6	69,3 73,3 75,3	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	43,0	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	46,2	48,2	50,2	52,2	54,2	56,2	58,2	60,2	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	17,1 19,1 20,1	17,4 19,4 20,4	17,8 19,8 20,8	17,9 19,9 20,9	18,1 20,1 21,1	18,3 20,3 21,3	18,7 20,7 21,7	19,0 21,0 22,0	(+/-)1,0
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	15,2	15,6	16,0	16,5	17,0	17,7	18,3	19,3	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	14,7	15,1	15,5	16,0	16,6	17,2	17,8	18,6	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	8,9	9,9	8,9	8,9	9,9	9,9	9,9	10,5	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	10,0	11,0	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0	11,2	(+/-)0,3
11	Длина воротника по отлету, см	все роста	45,2	46,0	46,8	47,6	48,6	49,6	50,6	51,6	(+/-)0,3

Продолжение Таблицы В76.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	64,3 68,3 70,3	64,5 68,5 70,5	64,7 68,7 70,7	65,2 69,2 71,2	66,5 70,5 72,5	66,8 70,8 72,8	67,0 71,0 73,0	67,3 71,3 73,3	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	42,5	43,2	44,0	44,6	45,3	46,0	46,8	47,6	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	70,3 74,3 76,3	71,0 75,0 77,0	71,8 75,8 77,8	73,0 77,0 79,0	74,8 78,8 80,8	75,8 79,8 81,8	76,8 80,8 82,8	77,8 81,8 83,8	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	62,2	64,2	66,2	68,2	70,2	72,2	74,2	76,2	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	19,4 21,4 22,4	19,7 21,7 22,7	20,0 22,0 23,0	20,3 22,3 23,3	20,5 22,5 23,5	20,8 22,8 23,8	21,0 23,0 24,0	21,5 23,5 24,5	(+/-)1,0
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	20,3	21,3	22,3	23,3	24,3	25,3	26,3	27,3	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	19,5	20,4	21,2	22,0	22,8	23,8	24,8	25,8	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	10,5	10,5	10,5	11,5	11,5	11,5	12,0	12,0	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	11,2	11,2	11,2	11,7	11,7	11,7	12,0	12,0	(+/-)0,3
11	Длина воротника по отлету, см	все роста	52,6	53,4	54,2	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	(+/-)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 275 из 529

В77. Блуза медицинская женская модель 336Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер, прямого силуэта, умеренного объема; без воротника, с V – образным вырезом горловины, обработанным сзади обтачкой, а спереди – притачными планками шириной 4,3-4,5 см в готовом виде, состоящими из двух полосок разной ширины; с боковыми разрезами.

Перед с отрезной кокеткой, шов притачивания которой проходит по линии груди; с горизонтальным подрезом ниже линии талии, в котором обработаны два боковых кармана.

Спинка со средним швом и эластичной тесьмой шириной 2,5 см, настроенной с внутренней стороны по линии талии тремя параллельными строчками с расстоянием между ними 1,1-1,2 см.

Рукава втачные, одношовные, короткие, длиной выше локтя.

Планки горловины и мешковины карманов должны быть выполнены из отделочных тканей двух цветов.

По горловине, разрезам, кокетке, горизонтальному подрезу переда, швам стачивания частей планок куртки и по швам их притачивания должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

По низу изделия и низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом основной и отделочной тканей.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

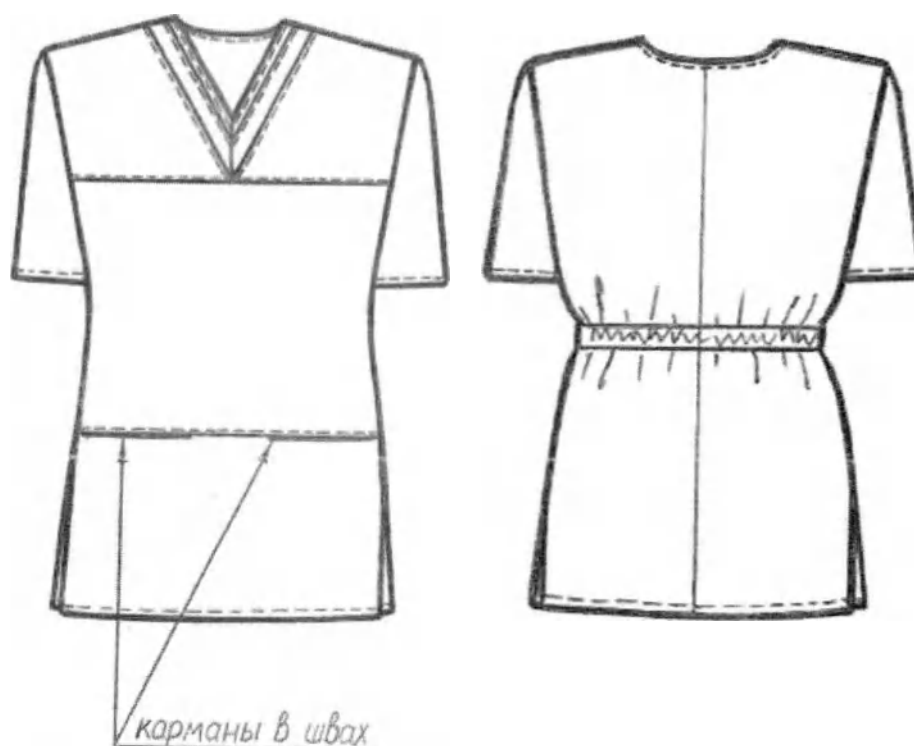


Рисунок В77–Блуза медицинская женская модель 336Б

Таблица В77.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 336Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Верхняя часть полочки	2	1
2	Средняя часть полочки	1	0
3	Нижняя часть полочки	1	0
4	Спинка	2	1
5	Рукав	2	1
6	Мешковина кармана	2	1
7	Обтачка горловины переда	2	1
8	Обтачка горловины спинки	1	0
	Отделочная ткань №1		
9	Мешковина кармана	2	1
10	Широкая часть планки горловины	2	1
	Отделочная ткань №2		
11	Широкая часть планки горловины	2	1
	Итого:	19	8

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 277 из 529

Таблица В77.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 336Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	65,5	64,6	64,7	64,8	65,2	65,6	65,8	66,0	(±)1,0
		164-170	68,5	68,6	68,7	68,8	69,2	69,6	69,8	70,0	
		176-182	70,5	70,6	70,7	70,8	71,2	71,6	71,8	72,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,5	36,5	37,5	38,4	39,3	40,2	41,0	41,8	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	68,8	69,5	70,0	70,5	71,4	72,4	73,0	73,8	(±)1,0
		164-170	72,8	73,5	74,0	74,5	75,4	76,4	77,0	77,8	
		176-182	74,8	75,5	76,0	76,5	77,4	78,4	79,0	79,8	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	50,5	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	21,8	21,9	22,0	22,0	22,2	22,5	22,9	23,0	(±)0,5
		164-170	23,8	23,9	24,0	24,0	24,2	24,5	24,9	25,0	
		176-182	24,8	24,9	25,0	25,0	25,2	25,5	25,9	26,0	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,0	17,6	18,4	19,3	19,9	20,5	21,1	21,8	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,4	18,0	17,6	18,2	18,8	19,3	19,9	20,5	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	13,7	13,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	15,7	(±)0,3
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	(±)0,3

Продолжение Таблицы В77.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	66,2	66,8	67,4	67,8	68,1	68,7	69,1	69,4	(±)1,0
		164-170	70,2	70,8	71,4	71,8	72,1	72,7	73,1	73,4	
		176-182	72,2	72,8	73,4	73,8	74,1	74,4	75,1	75,4	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	42,5	43,2	44,0	44,7	45,4	46,0	46,7	47,5	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	74,6	75,6	76,6	77,6	78,6	79,7	80,6	82,0	(±)1,0
		164-170	78,6	79,6	80,6	81,6	82,6	83,7	84,6	86,0	
		176-182	80,6	81,6	82,6	83,6	84,6	85,7	86,6	88,0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	63,0	65,0	67,0	69,2	71,4	73,6	85,8	78,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	66,0	68,0	70,0	72,2	74,4	76,7	79,0	81,5	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	23,1	23,3	23,5	23,8	23,9	24,2	24,7	25,3	(±)0,5
		164-170	25,1	25,3	25,5	25,8	25,9	26,2	26,7	27,3	
		176-182	26,1	26,3	26,5	26,8	26,9	27,2	27,7	28,3	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,4	23,1	23,8	24,6	25,5	26,4	27,4	28,4	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	21,2	21,9	22,7	23,5	24,4	25,2	26,2	27,2	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	15,7	15,7	15,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	(±)0,3
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	(±)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В78. Блуза медицинская женская модель 337Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер; полуприлегающего силуэта, с фигурной линией низа; спинка длиннее переда на 3,0 см с плавным переходом длины.

Перед с V-образным вырезом горловины, с центральной бортовой застежкой на 6 обметанных петель и 6 пуговиц, с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с косыми подрезами, выходящими из боковых швов ниже линии талии и доходящими до низа; с одним верхним накладным карманом закругленной формы; с двумя нижними накладными карманами, передние углы которых закруглены, а задние входят в швы подрезов.

Спинка с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа.

Рукава втачные, одношовные, короткие.

Воротник - стойка, передние края которой закруглены и заканчиваются в верхней части горловины.

Полочки и карманы должны быть выполнены из основной ткани №1, а нижние боковые части полочек, спинка, рукава и воротник – из основной ткани №2.

По краям бортов и горловины, воротнику, рельефам, подрезам, низу изделия, швам настрачивания карманов и шву втачивания воротника в горловину должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По верхним краям карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,9-2,1 см.

По низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться пластиковые пуговицы диаметром 1,3-1,5 см в тональном сочетании с основной тканью №2 или металлические кнопки диаметром 1,0-1,2см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70;

Рост:164-170.



Рисунок В78—Блуза медицинская женская модель 337Б

Таблица В78.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 337Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань №1			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Верхний карман	1	0
4	Нижний карман	1	0
5	Подборт	2	1
Основная ткань №2			
6	Спинка	1	0
7	Бочок спинки	2	1
8	Рукав	2	1
9	Воротник	2	1
10	Нижняя часть бочка полочки	2	1
Итого		17	7

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 280 из 529

Таблица В78.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 337Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	73,0	73,5	74,1	74,5	75,0	75,5	75,8	76,0	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	35,3	36,3	37,3	38,3	39,2	40,1	41,0	41,9	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	71,0	71,8	72,7	73,7	74,7	75,7	76,6	77,4	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	45,6	47,7	49,8	51,9	54,0	56,1	58,2	60,3	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	164-170	51,6	53,7	55,8	57,9	60,0	62,1	64,2	66,3	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	164-170	15,8	16,0	16,1	16,3	16,5	17,0	17,3	18,6	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	17,4	18,0	18,7	19,3	19,9	20,6	21,4	22,2	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу	164-170	17,4	18,0	18,7	19,3	19,8	20,5	21,2	22,0	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	164-170	9,2	9,2	9,2	9,9	9,9	9,9	10,9	10,9	(+/-)0,5
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	164-170	9,8	9,8	9,8	10,1	10,1	10,1	10,5	10,5	(+/-)0,5
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	14,3	15,2	15,2	16,1	16,1	16,1	17,7	17,7	(+/-)0,5
12	Глубина нижнего кармана, см	164-170	16,3	16,3	16,3	16,7	16,7	16,7	17,4	17,4	(+/-)0,5
13	Длина воротника по отлету, см	164-170	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5	31,0	31,6	32,1	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В78.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	76,3	76,8	77,2	77,2	77,3	77,4	77,5	77,8	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	42,8	43,7	44,6	45,5	46,2	46,8	47,4	48,1	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	78,1	78,8	79,6	80,4	81,2	82,0	82,8	83,6	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	62,3	64,4	66,5	68,6	70,7	72,8	74,9	78,0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	164-170	68,4	70,6	72,8	75,0	77,2	79,4	81,6	83,8	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	164-170	19,0	19,2	19,5	19,8	20,0	20,2	20,5	20,8	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	22,9	23,7	24,6	25,3	26,0	26,7	27,4	28,1	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	22,8	23,6	24,4	25,1	25,8	26,5	27,2	27,9	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	164-170	10,9	11,9	11,9	11,9	11,9	12,5	12,5	12,5	(+/-)0,5
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	164-170	10,5	11,1	11,1	11,1	11,1	12,0	12,0	12,0	(+/-)0,5
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	17,7	19,3	19,3	20,0	20,0	21,0	21,0	21,0	(+/-)0,5
12	Глубина нижнего кармана, см	164-170	17,4	18,4	18,4	19,0	19,0	20,0	20,0	20,0	(+/-)0,5
13	Длина воротника по отлету, см	164-170	32,7	33,4	34,0	34,5	35,0	35,5	36,0	36,5	(+/-)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В79. Блуза медицинская женская модель 339Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер; полуприлегающего силуэта; отрезная ниже линии талии на 15 см; без воротника, с круглым вырезом горловины, обработанным обтачкой. Нижняя часть куртки выполнена в виде волана шириной 15,0-15,2см.

Перед с центральной бортовой застежкой на 5 кнопок; с закругленными рельефными швами, выходящими из верхних частей пройм и доходящими до горизонтального подреза; с двумя накладными карманами фигурной формы, задние боковые срезы которых входят в боковые швы, а нижние – в шов притачивания нижней части куртки.

Спинка со средним швом и закругленными рельефными швами, выходящими из верхних частей пройм и доходящими до горизонтального подреза.

Рукава втачные, одношовные, длиной $3\frac{1}{4}$; нижняя часть рукавов отрезная и выполнена в виде воланов шириной 8,2-8,4см.

По рельефам, горловине, краям бортов, карманов, низу изделия и низу рукавов, а также швам притачивания воланов и настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

На правом боковом кармане должна быть выполнена фирменная вышивка.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,0-1,2см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.



Рисунок В79–Блуза медицинская женская модель 339Б

Таблица В79.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 339Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	2	1
4	Бочок спинки	2	1
5	Волан полочки	2	1
6	Волан спинки	1	0
7	Карман	2	1
8	Рукав	2	1
9	Волан рукава	2	1
10	Обтачка кармана	2	1
11	Подборт	2	1
12	Обтачка горловины спинки	1	0
Итого		23	10

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 283 из 529

Таблица В79.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 339Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	63,3	63,5	63,7	64,0	64,3	64,6	64,9	65,3	(+/-)1,0
		164-170	67,3	67,5	67,7	68,0	68,3	68,6	68,9	69,3	
		176-182	69,3	69,5	69,7	70,0	70,3	70,6	70,9	71,3	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	34,8	35,6	36,5	37,3	38,0	38,6	39,3	40,0	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	65,8	66,0	66,7	67,5	68,2	69,0	69,9	70,8	(+/-)1,0
		164-170	69,8	70,0	70,7	71,5	72,2	73,0	73,9	74,8	
		176-182	71,8	72,0	72,7	73,5	74,2	75,0	75,9	76,8	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	(+/-)1,0
5	Ширина изделия по шву притачивания волана, см	все роста	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	40,2	40,5	40,5	40,6	40,9	41,1	41,3	41,4	(+/-)1,0
		164-170	43,2	43,5	43,5	43,6	43,9	44,1	44,3	44,4	
		176-182	44,7	45,0	45,0	45,1	45,4	45,6	45,9	45,9	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	16,9	17,5	18,0	18,6	19,5	20,3	45,8	22,0	(+/-)0,5
8	Ширина рукава по шву притачивания волана, см	все роста	15,3	15,7	15,9	16,1	16,8	17,5	21,1	18,5	(+/-)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	14,3	14,8	15,9	16,8	17,8	18,3	18,0	20,2	(+/-)0,3
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	16,0	16,2	16,5	16,7	16,8	17,0	19,2	17,5	(+/-)0,3

Продолжение Таблицы В79.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	65,6	65,9	66,2	66,5	66,8	67,1	67,4	67,7	(+/-)1,0
		164-170	69,6	69,9	70,2	70,5	70,8	71,1	71,4	71,7	
		176-182	71,6	71,9	72,2	72,5	72,8	73,7	73,4	73,7	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	40,6	41,2	41,8	42,4	43,0	43,6	44,2	44,8	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	71,7	72,6	73,5	74,4	75,3	76,2	77,1	78,0	(+/-)1,0
		164-170	75,7	76,6	77,5	78,4	79,3	80,2	81,1	82,0	
		176-182	77,7	78,6	79,5	80,4	81,3	82,2	83,1	84,0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5	72,5	74,5	(+/-)1,0
5	Ширина изделия по шву притачивания волана, см	все роста	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5	72,5	74,5	76,5	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	41,6	41,8	42,0	42,2	42,4	42,6	42,8	43,0	(+/-)1,0
		164-170	44,6	44,8	45,0	45,2	45,4	45,6	45,8	46,0	
		176-182	46,1	46,3	46,5	46,7	46,9	47,1	47,3	47,5	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,7	23,4	24,1	24,8	25,5	26,2	26,9	27,6	(+/-)0,5
8	Ширина рукава по шву притачивания волана, см	все роста	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	(+/-)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	21,0	21,8	22,6	23,4	24,2	25,0	25,8	26,6	(+/-)0,3
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	17,7	17,9	18,1	18,3	18,5	18,6	18,7	18,8	(+/-)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В80. Блуза медицинская женская модель 340Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер, прямого силуэта, умеренного объема, без воротника, с фигурным вырезом горловины, обработанным обтачкой; с разрезами в боковых швах.

Перед с косыми подрезами, выходящими из горловины и заканчивающимися в верхней части пройм; с отрезной кокеткой, шов притачивания которой проходит через линию груди; с двумя нижними накладными карманами прямоугольной формы, задние срезы которых входят в боковые швы и одним дополнительным накладным карманом, настроенным под правым нижним карманом, на 3,0 см выше и правее него, задним срезом также входящим в боковой шов.

Спинка с косыми подрезами, выходящими из горловины и заканчивающимися в верхней части пройм; со средним швом и эластичной тесьмой шириной 4,0 см, настроенной с внутренней стороны по линии талии тремя параллельными строчками с расстоянием между ними 1,8-1,9 см.

Рукава втачные, одношовные, короткие, длиной выше локтя.

Части переда и спинки, расположенные выше косых подрезов, рукава, а также дополнительные карманы могут быть выполнены из отделочной гладкокрашеной ткани.

По горловине, швам притачивания кокетки и верхних частей переда и спинки, боковым разрезам и швам настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По линиям входа в карманы должна быть проложена строчка на расстоянии 2,0-2,2 см от края.

По низу изделия и низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом основной и отделочной тканей.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

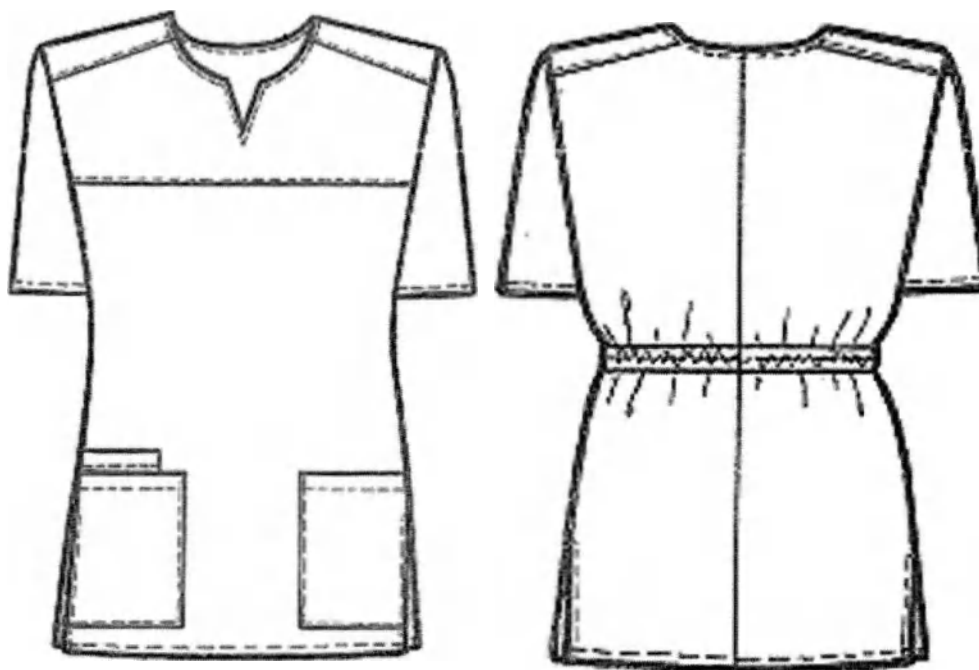


Рисунок В80–Блуза медицинская женская модель 340Б

Таблица В80.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 340Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Перед	1	0
2	Кокетка переда	1	0
3	Спинка	2	1
4	Карман основной	2	1
5	Обтачка горловины переда	1	0
6	Обтачка горловины спинки	1	0
Отделочная ткань			
7	Рукав	2	1
8	Верхняя часть кокетки переда	2	1
9	Верхняя часть спинки	2	1
10	Карман дополнительный	1	0
ИТОГО		15	5

Таблица В81.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 340Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	65,6	65,7	65,8	65,9	66,3	66,7	66,9	67,1	(±)1,0
		164-170	69,6	69,7	69,8	69,9	70,3	70,7	70,9	71,1	
		176-182	71,6	71,7	71,8	71,9	72,3	72,7	72,9	73,1	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,5	36,5	37,5	38,4	39,3	40,2	41,0	41,8	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	69,8	70,4	71,0	71,4	72,0	72,8	73,3	74,1	(±)1,0
		164-170	73,8	74,4	75,0	75,4	76,0	76,8	77,3	78,1	
		176-182	75,8	76,4	77,0	77,4	78,0	78,8	79,3	80,1	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	22,0	22,1	22,2	22,2	22,4	22,7	23,1	23,2	(±)0,5
		164-170	24,0	24,1	24,2	24,2	24,4	24,7	25,1	25,2	
		176-182	25,0	25,1	25,2	25,2	25,4	25,7	26,1	26,2	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,0	17,6	18,4	19,3	19,9	20,5	21,1	21,8	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,4	17,0	17,6	18,2	18,8	19,3	19,9	20,5	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	(±)0,5
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	19,0	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3	(±)0,5

Продолжение Таблицы В80.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	67,3	67,9	68,5	68,9	69,2	69,8	70,2	70,5	(±)1,0
		164-170	71,3	71,9	72,5	72,9	73,2	73,8	74,2	74,5	
		176-182	73,3	73,9	74,5	74,9	75,2	75,8	76,2	76,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	42,5	43,2	44,0	44,7	45,4	46,0	46,7	47,5	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	74,9	75,9	76,9	77,9	78,9	80,1	81,2	82,5	(±)1,0
		164-170	78,9	79,9	80,9	81,9	82,9	84,1	85,2	86,5	
		176-182	80,9	81,9	82,9	83,9	84,9	86,1	87,2	88,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	63,0	65,0	67,0	69,2	71,4	73,6	75,8	78,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	65,5	67,5	69,5	71,7	73,9	76,2	78,5	81,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	23,3	23,5	23,7	24,0	24,1	24,4	24,9	25,5	(±)0,5
		164-170	25,3	25,5	25,7	26,0	26,1	26,4	26,9	27,5	
		176-182	26,3	26,5	26,7	27,0	27,1	27,4	27,9	28,5	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,4	23,1	23,8	24,6	25,5	26,4	27,4	28,4	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	21,2	21,9	22,7	23,5	24,4	25,2	26,2	27,2	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	20,8	21,0	21,5	21,8	22,0	22,5	22,8	23,0	(±)0,5
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	19,3	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,6	19,6	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 287 из 529

В81. Блуза медицинская женская модель 341Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер; полуприлегающего силуэта; со вставками шириной 6,4-6,6см в плечевых швах и посередине рукавов, со смещением вперед (2,0см от ширины вставки должно приходиться на спинку, а 4,5см – на перед).

Перед с центральной бортовой застежкой на 5 кнопок; с фигурным вырезом горловины; с рельефными швами, выходящими из горловины и доходящими до низа изделия; с двумя накладными карманами, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы, а верхние края обработаны планками шириной 3,5-3,7см. Карманы должны быть оформлены вертикальными вставками шириной 4,3-4,5см.

Спинка с рельефными швами, выходящими из горловины и доходящими до низа; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скрепленными посередине спинки с помощью кнопки. Для регулировки степени прилегания изделия по линии талии на правом полупоясе должны быть установлены две нижних части кнопки с расстоянием 2,5см.

Рукава втачные, длиной $3\frac{1}{4}$, с притачными манжетами шириной 3,3-3,5см.

Воротник – стойка высотой 3,5-3,7см.

Для вставок должна использоваться отделочная ткань в контрастном сочетании с основной тканью.

По рельефам, краям воротника, бортов, полупоясов, швам втачивания вставок, настрачивания карманов, швам притачивания планок карманов и манжет, а также шву втачивания воротника в горловину должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,2-1,5см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом основной и отделочной тканей.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

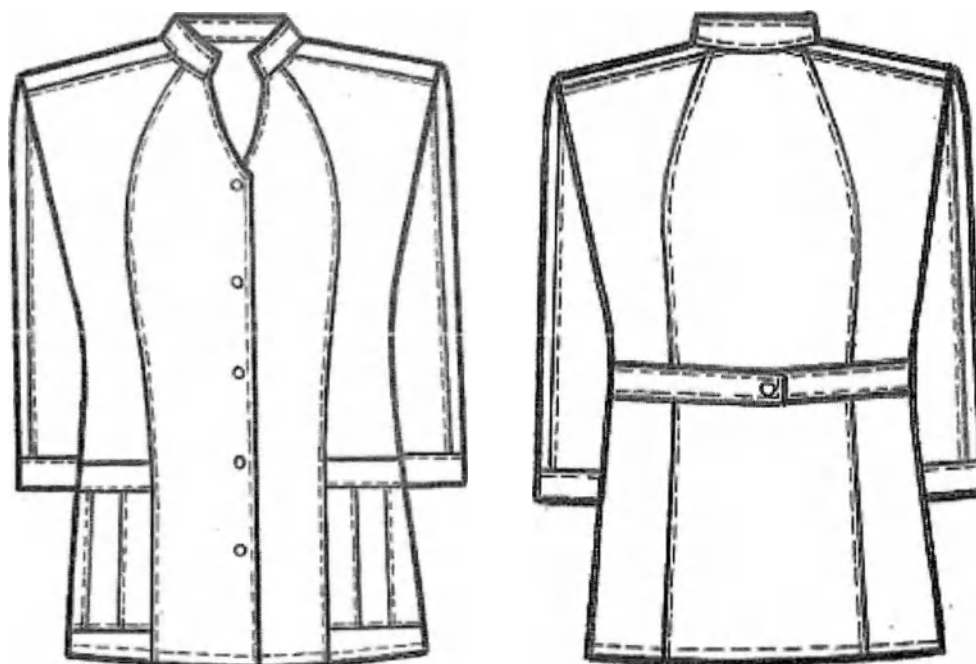


Рисунок В81–Блуза медицинская женская модель 341Б

Таблица В81.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 341Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	1	0
4	Бочок спинки	2	1
5	Передняя часть рукава	2	1
6	Задняя часть рукава	2	1
7	Передняя часть кармана	2	1
8	Задняя часть кармана	2	1
9	Планка кармана	2	1
10	Воротник	2	1
11	Манжета	2	1
12	Полупояс	2	1
13	Подборт	2	1
Отделочная ткань			
14	Вставка рукава	2	1
15	Кокетка	2	1
16	Вставка кармана	2	1
Итого:		31	15

Таблица В81.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 341Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	65,6	66,1	66,7	67,1	67,6	68,1	68,4	68,6	(±)1,0
		164-170	69,6	70,1	70,7	71,1	71,6	72,1	72,4	72,6	
		176-182	71,6	72,1	72,7	73,1	73,6	74,1	74,4	74,6	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	(±)1,0
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	68,1	68,7	69,6	70,5	71,4	72,0	72,7	73,5	(±)1,0
		164-170	72,1	72,7	73,6	74,5	75,4	76,0	76,7	77,5	
		176-182	74,1	74,7	75,6	76,5	77,4	78,0	78,7	79,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,9	47,0	49,1	51,2	53,3	55,4	57,5	59,6	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	51,2	53,3	55,4	57,5	59,6	61,7	63,8	65,9	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	40,2	50,5	40,7	40,8	41,1	41,4	41,5	41,8	(±)1,0
		164-170	43,2	43,5	43,7	43,8	44,1	44,4	44,5	44,8	
		176-182	44,7	45,0	45,2	45,3	45,6	45,9	46,0	46,3	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	16,6	17,7	17,6	18,1	18,6	19,2	19,9	20,8	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	13,1	14,0	14,7	15,5	16,2	16,8	17,9	18,8	(±)0,3
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	17,0	17,2	17,3	17,5	17,7	17,8	17,8	17,8	(±)0,3
11	Длина воротника по отлету, см	все роста	32,2	33,0	33,7	34,4	35,2	35,8	36,4	37,2	(±)0,5

Продолжение Таблицы В81.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	68,9	69,4	69,8	69,8	69,9	70,0	70,1	70,4	(±)1,0
		164-170	72,9	73,4	73,8	73,8	73,9	74,0	74,1	74,4	
		176-182	74,9	75,4	75,8	75,8	75,9	76,0	76,1	76,4	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,0	43,8	44,4	45,2	45,9	46,5	47,1	47,8	(±)1,0
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	74,3	75,3	76,3	77,3	77,9	78,9	79,9	80,9	(±)1,0
		164-170	78,3	79,3	80,3	81,3	81,9	82,9	83,9	84,9	
		176-182	80,3	81,3	82,3	83,3	83,9	84,9	85,9	86,9	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	61,6	63,7	65,8	67,9	70,0	72,1	74,2	76,3	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	68,0	70,2	72,4	74,6	76,8	79,0	81,2	83,4	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	42,1	42,4	42,7	42,9	43,1	43,3	43,5	43,7	(±)1,0
		164-170	45,1	45,4	45,7	45,9	46,1	46,3	46,5	46,7	
		176-182	46,6	46,9	47,2	47,4	47,6	47,8	48,0	48,2	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	21,6	22,3	23,0	23,6	24,2	24,9	25,6	26,3	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	17,4	17,8	18,1	18,6	19,1	19,8	20,4	21,0	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	19,7	20,6	21,5	19,7	19,8	19,9	20,0	20,4	(±)0,3
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	17,9	17,9	17,9	18,0	18,3	18,4	18,5	18,5	(±)0,3
11	Длина воротника по отлету, см	все роста	38,0	38,8	39,6	40,4	41,2	42,0	42,8	43,6	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 290 из 529

В82. Блуза медицинская женская модель 342Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер; прямого силуэта, умеренного объема; с овальным вырезом горловины, обработанным обтачкой; с разрезами в боковых швах; со съемным двусторонним поясом, застегивающимся на 3 кнопки, расположенные на расстоянии 3,0 см, что позволяет регулировать его длину.

Перед с двумя нагрудными втачками, выходящими из боковых швов; с двумя ассиметричными вставками в виде углов – одна выходит из левой проймы выше линии груди и заканчивается в линии низа, вторая выходит из горловины и заканчивается в правом боковом шве; с одним верхним карманом в шве притачивания левой вставки; с двумя нижними карманами – один в шве притачивания правой вставки, другой в горизонтальном подрезе, выходящем из шва притачивания левой вставки и заканчивающемся в левом боковом шве.

Спинка со средним швом, двумя вытачками в горловине и эластичной тесьмой шириной 2,5 см, настроенной с внутренней стороны по линии талии тремя параллельными строчками с расстоянием между ними 1,1-1,2 см.

Рукава втачные, одношовные, длиной выше локтя. Низ рукавов должен быть оформлен подгибкой шириной 2,9-3,1 см, застроченной на лицевую сторону. На правом рукаве выше линии подгибки должна быть настроена отделочная деталь размером 3,5-3,7 см на 10,0-10,2 см.

Угловые вставки переда, одна сторона пояса и отделочная деталь рукава должны быть выполнены из отделочной ткани.

По горловине, разрезам, швам втачивания вставок переда и шву настрачивания отделки рукава должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,1-1,3 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом основной и отделочной тканей.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.



Рисунок В82–Блуза медицинская женская модель 342Б

Таблица В82.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 342Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет. кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Центральная часть переда	1	0
2	Правая верхняя часть переда	1	0
3	Правая нижняя часть переда	1	0
4	Левая верхняя часть переда	1	0
5	Левая средняя часть переда	1	0
6	Левая нижняя часть переда	1	0
7	Спинка	2	1
8	Рукав	2	1
9	Пояс	1	0
10	Мешковина верхнего кармана	2	1
11	Мешковина правого нижнего кармана	2	1
12	Мешковина левого нижнего кармана	1	0
13	Обтачка горловины переда	1	0
14	Обтачка горловины спинки	1	0
Отделочная ткань			
15	Правая вставка переда	1	0
16	Левая вставка переда	1	0
17	Отделка рукава	1	0
18	Пояс	1	0

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Прокладочный материал (клеевая)			
19	Пояс	2	1
	Итого:	24	5

Таблица В82.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 342Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	63,6	63,7	63,8	63,9	64,3	64,7	64,9	65,1	(±)1,0
		164-170	67,6	67,7	67,8	67,9	68,3	68,7	68,9	69,1	
		176-182	69,6	69,7	69,8	69,9	70,3	70,7	70,9	71,1	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,7	36,7	37,7	38,6	39,5	40,4	41,2	42,0	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	67,3	68,0	68,5	69,0	69,7	70,9	71,5	72,3	(±)1,0
		164-170	71,3	72,0	72,5	73,0	73,7	74,9	75,5	76,3	
		176-182	73,3	74,0	74,5	75,0	75,7	76,9	77,5	78,3	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы	все роста	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	(±)1,0
6	Длина рукава см	152-158	21,8	21,9	22,0	22,1	22,2	22,5	22,9	23,0	(±)0,5
		164-170	23,8	23,9	24,0	24,1	24,2	24,5	24,9	25,0	
		176-182	24,8	24,9	25,0	25,1	25,2	25,5	25,9	26,0	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	16,7	17,3	18,1	19,0	19,6	20,2	20,8	21,5	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,1	16,7	17,3	17,9	18,5	19,0	19,6	20,2	(±)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	9,7	9,7	10,3	10,3	10,3	11,3	11,3	11,3	(±)0,3
10	Ширина левого нижнего кармана по линии входа, см	все роста	16,7	17,4	18,2	19,0	19,8	20,6	21,4	22,2	(±)0,3
11	Ширина правого нижнего кармана по линии входа, см	все роста	12,6	12,6	13,5	13,5	14,6	14,6	15,5	15,5	(±)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	(±)0,3

Продолжение Таблицы В82.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	65,3	65,9	66,5	66,9	67,2	67,8	68,2	68,5	(±)1,0
		164-170	69,3	69,9	70,5	70,9	71,2	71,8	72,2	72,5	
		176-182	71,3	71,9	72,5	72,9	73,2	73,8	74,2	74,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	42,7	43,4	44,2	44,9	45,7	46,3	46,9	47,7	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	73,1	74,1	75,1	76,1	77,1	78,2	79,1	80,5	(±)1,0
		164-170	77,1	78,1	79,1	80,1	81,1	82,8	83,1	84,5	
		176-182	79,1	80,1	81,1	82,1	83,1	84,2	85,1	86,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы	все роста	63,0	65,0	67,0	69,2	71,4	73,6	75,8	78,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	66,5	68,5	70,5	72,7	74,9	77,2	79,5	82,0	(±)1,0
6	Длина рукава см	152-158	23,1	23,3	23,5	23,8	23,9	24,2	24,7	25,3	(±)0,5
		164-170	25,1	25,3	25,5	25,8	25,9	26,2	26,7	27,3	
		176-182	26,1	26,3	26,5	26,8	26,9	27,2	27,7	28,3	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,1	22,8	23,5	24,3	25,2	26,1	27,1	28,1	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	20,9	21,6	22,4	23,2	24,1	24,9	25,9	26,9	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоцелевого использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 293 из 529

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	11,8	11,8	11,8	12,2	12,2	12,2	12,5	12,5	(+/-)0,3
10	Ширина левого нижнего кармана по линии входа, см	все роста	23,0	23,7	24,4	25,2	26,0	26,8	27,4	28,2	(+/-)0,3
11	Ширина правого нижнего кармана по линии входа, см	все роста	15,5	16,0	16,0	16,0	16,5	16,5	16,5	17,0	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	(+/-)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-
2023, ред.2

Страница 294 из 529

В83. Блуза медицинская женская модель 343Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер; прямого силуэта, умеренного объема; с разрезами в боковых швах и разъемной застежкой на 5 кнопок в левом плечевом шве. Застежка должна быть оформлена притачными планками шириной 3,0-3,2 см.

Перед с двумя косыми нагрудными втачками, выходящими из пройм; с отрезной нижней частью шириной 10,0-10,2 см; с П-образной декоративной вставкой, горизонтальная часть которой проходит по линии груди, а вертикальные доходят до шва притачивания нижней части переда; с одним боковым накладным карманом справа. Передний срез кармана входит в шов втачивания декоративной вставки, задний – в правый боковой шов, а нижний – в шов притачивания нижней части переда.

Спинка с притачной кокеткой; отрезной нижней частью шириной 10,0-10,2 см; рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до шва притачивания нижней части спинки. На центральной части спинки на уровне линии талии должна быть настрочена кулиска шириной 2,1-2,3 см, состоящая из двух частей, вшитых в рельефные швы, в каждую из которых продета завязка шириной 0,9-1,1 см.

Рукава втачные, длиной выше локтя. Левый – одношовный, правый из передней и задней частей. На правом рукаве выше линии подгибки должна быть настрочена отделочная деталь размером 4,5х8,0 см.

Вставка переда, отрезные нижние части переда, спинки, кокетка спинки и отделочная деталь рукава должны быть выполнены из отделочной ткани.

По горловине, кокетке, рельефам, разрезам, низу изделия, швам втачивания вставки переда, швам притачивания планок застежки и нижних частей переда и спинки, швам настрачивания кулиски и отделки рукава, а также по швам застрачивания завязок должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу рукавов и верхнему краю карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,7-2,9 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,1-1,3 см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

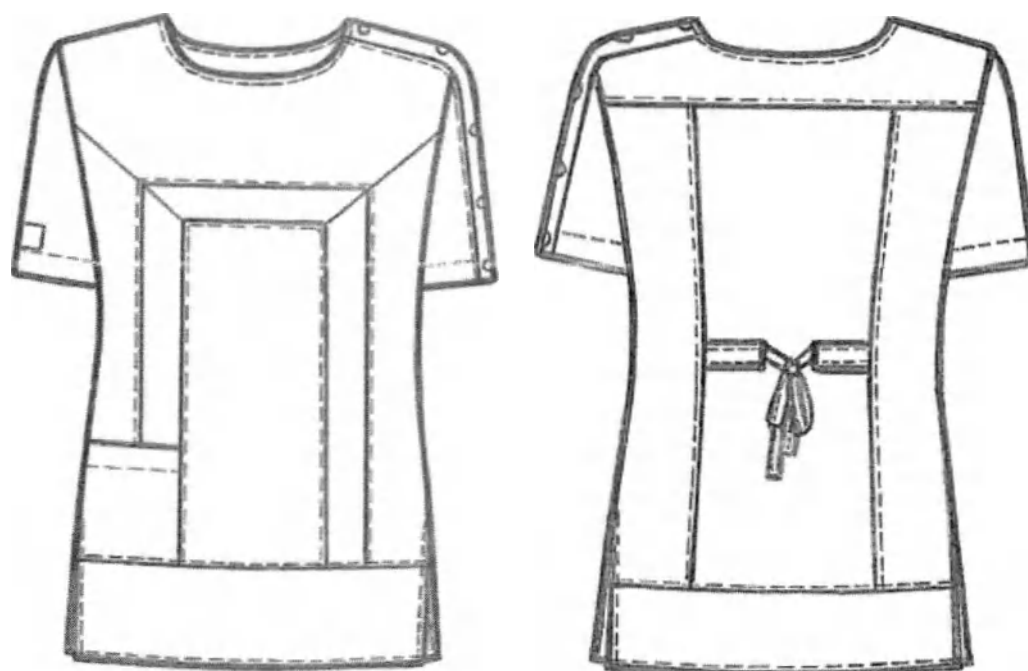


Рисунок В83–Блуза медицинская женская модель 343Б

Таблица В83.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 343Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Центральная часть переда	1	0
2	Бочок переда	2	1
3	Кокетка переда	1	0
4	Центральная часть спинки	1	0
5	Бочок спинки	2	1
6	Правый рукав	1	0
7	Передняя часть левого рукава	1	0
8	Задняя часть левого рукава	1	0
9	Планка застежки	2	1
10	Карман	1	0
11	Кулиска	2	1
12	Завязка	2	1
13	Обтачка горловины переда	1	0
14	Обтачка горловины спинки	1	0
Отделочная ткань			
15	Вертикальная вставка переда	2	1
16	Горизонтальная вставка переда	1	0
17	Отделка рукава	1	0
18	Кокетка спинки	1	0
19	Нижняя часть переда	1	0
20	Нижняя часть спинки	1	0

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA¹ по ТУ 14.12.30-002-11903952-
2023, ред.2

Таблица В83.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 343Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	65,0	65,5	66,1	66,5	67,0	67,5	67,8	68,0	(±)1,0
		164-170	69,0	69,5	70,1	70,5	71,0	71,5	71,8	72,0	
		176-182	71,0	71,5	72,1	72,5	73,0	73,5	73,8	74,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,8	36,8	37,8	38,8	39,8	40,8	41,8	42,8	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	68,1	68,7	69,6	70,5	71,4	72,0	72,7	73,5	(±)1,0
		164-170	72,1	72,7	73,6	74,5	75,4	76,0	76,7	77,5	
		176-182	74,1	74,7	75,6	76,5	77,4	78,0	78,7	79,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	46,0	48,0	50,0	52,2	54,3	56,4	58,5	60,5	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	52,0	54,0	56,0	58,0	60,2	62,5	65,0	67,5	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	22,7	22,9	23,2	23,7	24,0	24,1	24,5	25,3	(±)0,5
		164-170	24,7	24,9	25,2	25,7	26,0	26,1	26,5	27,3	
		176-182	25,7	25,9	26,2	26,7	27,0	27,1	27,5	28,3	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	16,6	17,1	17,5	18,0	18,8	19,5	20,4	21,3	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,1	16,5	16,8	17,3	17,8	18,5	19,2	20,1	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	14,7	15,5	16,2	17,3	18,2	19,0	20,0	21,2	(±)0,3
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	15,0	15,0	15,1	15,4	15,6	15,7	16,1	16,3	(±)0,3

Продолжение Таблицы В83.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	68,3	68,8	69,2	69,2	69,3	69,4	69,5	69,8	(±)1,0
		164-170	72,3	72,8	73,2	73,2	73,3	73,4	73,5	73,8	
		176-182	74,3	74,8	75,2	75,2	75,3	75,4	75,5	75,8	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,8	44,6	45,2	46,0	46,7	47,3	47,9	48,6	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	74,3	75,3	76,3	77,3	77,9	78,9	79,9	80,9	(±)1,0
		164-170	78,3	79,3	80,3	81,3	81,9	82,9	83,9	84,9	
		176-182	80,3	81,3	82,3	83,3	83,9	84,9	85,9	86,9	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	62,7	64,9	67,1	69,3	71,5	73,7	75,9	78,1	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	69,7	71,9	74,1	76,3	78,5	80,7	82,9	86,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	25,5	25,8	26,0	26,2	26,4	26,6	26,8	27,0	(±)0,5
		164-170	27,5	27,8	28,0	28,2	28,4	28,6	28,8	29,0	
		176-182	28,5	28,8	29,0	29,2	29,4	29,6	29,8	30,0	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,3	23,3	24,2	25,0	25,8	26,4	27,2	28,0	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	20,8	21,6	22,3	23,0	23,7	24,4	25,2	26,0	(±)0,5
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	22,1	23,1	22,0	22,0	22,2	22,3	22,5	22,5	(±)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	17.1	17.2	17.2	17.3	17.3	17.5	17.5	17.6	(+/-)0.3

В84. Блуза медицинская женская модель 351Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер, полуприлегающего силуэта.

Перед с комбинированной бортовой застёжкой: от линии груди до низа изделия – центральная, на 4 кнопки, выше линии груди – смещённая, на одну кнопку; с притачными кокетками, с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа; с двумя косыми подрезами, выходящими из нижней части пройм и заканчивающимися в рельефных швах ниже талии; с двумя верхними накладными карманами, передним срезом входящими в рельефные швы на уровне линии груди; с двумя нижними накладными карманами с наклонным входом, передние срезы которых входят в швы подрезов и в рельефные швы, задние срезы входят в боковые швы, а верхние края обработаны притачными планками шириной 4,0 – 4,2см.

Спинка с притачной кокеткой; с вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с двумя косыми подрезами, выходящими из нижней части пройм и заканчивающимися в рельефных швах ниже линии талии; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скреплёнными посередине спинки с помощью кнопки. Для регулировки степени прилегания изделия по талии на правом полупоясе должны быть установлены две нижних части кнопки с расстоянием 2,5см.

Рукава втачные, одношовные, длиной выше локтя, с притачными манжетами шириной 4,2 – 4,4см.

Воротник – стойка. Спереди правый конец стойки запахивается на левую полочку и прикрепляется к ней с помощью кнопки.

По краям бортов, воротнику, кокеткам, рельефам, подрезам, швам притачивания планок карманов и манжет, швам втачивания воротника в горловину и настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1 – 0,2см от края или шва.

По линиям входа верхних карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,4 – 1,6см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3 – 1,5см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,1 – 1,3см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

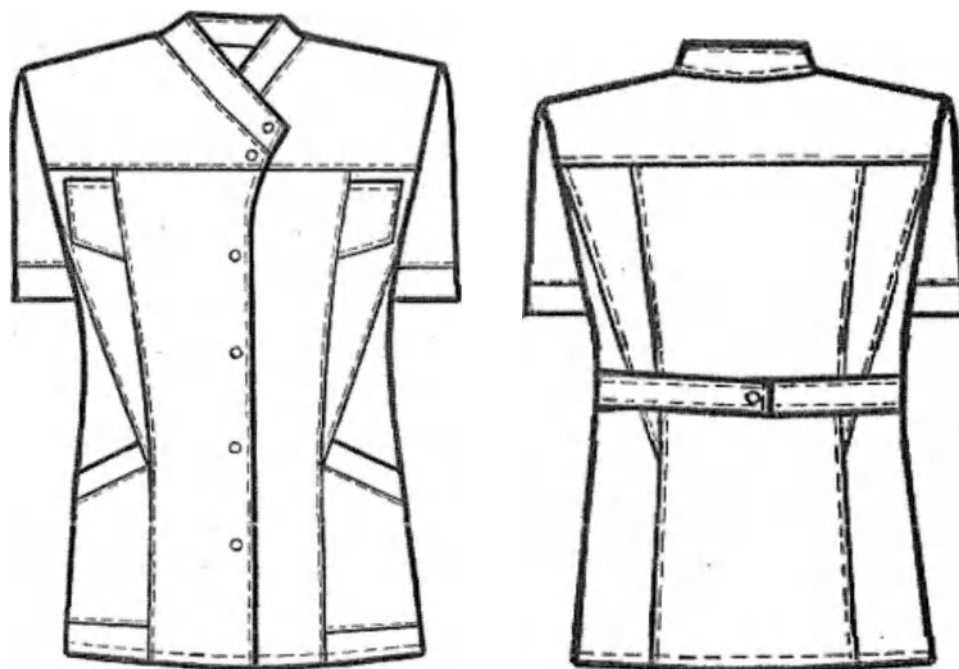


Рисунок В84—Блуза медицинская женская модель 351Б

Таблица В84.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 351Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Верхняя часть бочка полочки	2	1
4	Спинка	1	0
5	Бочок спинки	2	1
6	Верхняя часть бочка спинки	2	1
7	Кокетка полочки	2	1
8	Кокетка спинки	1	0
9	Рукав	2	1
10	Манжета	2	1
11	Верхний карман	2	1
12	Нижний карман	2	1
13	Планка кармана	2	1
14	Воротник	2	1
15	Полупояс	2	1
16	Подборт	2	1
Итого		30	14

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA¹ по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Таблица В84.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 351Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	63,0	63,5	64,0	64,5	65,0	65,5	65,8	66,0	(±)1,0
		164-170	67,0	67,5	68,0	68,5	69,0	69,5	69,8	70,0	
		176-182	69,0	69,5	70,0	70,5	71,0	71,5	71,8	72,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	34,8	35,7	36,6	37,6	38,6	39,6	40,6	41,6	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	67,0	67,8	68,6	69,4	70,2	71,0	71,7	72,3	(±)1,0
		164-170	71,0	71,8	72,6	73,4	74,2	75,0	75,7	76,3	
		176-182	73,0	73,8	74,6	75,4	76,2	77,0	77,7	78,3	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	43,0	45,0	47,1	49,2	51,3	53,5	55,6	57,8	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	50,0	52,0	54,0	56,1	58,2	60,3	62,4	64,5	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	23,3	23,7	24,1	24,5	24,7	25,0	25,2	25,4	(±)1,0
		164-170	25,3	25,7	26,1	26,5	26,7	27,0	27,2	27,4	
		176-182	26,3	26,7	27,1	27,5	27,7	28,0	28,2	28,4	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	16,8	17,5	18,1	18,7	19,4	20,2	21,0	21,8	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,0	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0	19,6	20,2	(±)0,5
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	5,6	5,6	5,8	5,8	60,0	6,4	6,5	6,6	(±)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	11,2	11,4	11,6	11,8	11,9	12,1	12,2	12,4	(±)0,3
11	Ширина нижнего кармана внизу, см	все роста	15,2	16,1	17,0	17,7	18,4	19,0	19,8	20,7	(±)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	152-158	18,5	18,6	18,8	19,1	19,3	19,5	19,5	19,5	(±)0,3
		164-170	20,5	20,6	20,7	21,1	21,3	21,5	21,5	21,5	
		176-182	20,5	20,6	20,7	21,1	21,3	21,5	21,5	21,5	
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	61,0	62,0	63,2	64,5	65,8	67,2	68,4	69,6	(±)0,5

Продолжение Таблицы В84.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	66,2	66,5	66,7	66,8	67,0	67,1	67,3	67,5	(±)1,0
		164-170	70,2	70,5	70,7	70,8	71,0	71,1	71,3	71,5	
		176-182	72,0	72,5	72,7	72,8	73,0	73,1	73,3	73,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	42,5	43,5	44,5	45,3	46,1	47,0	47,8	48,6	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	73,0	73,8	74,7	75,6	76,5	77,3	78,2	79,0	(±)1,0
		164-170	77,0	77,8	78,7	79,6	80,5	81,3	82,2	83,0	
		176-182	79,0	79,8	80,7	81,6	82,5	83,3	84,2	85,0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	59,9	61,0	64,1	66,2	68,3	70,4	72,5	74,6	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	66,6	68,7	70,8	72,9	75,0	77,1	79,2	81,3	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	25,8	26,1	26,4	26,6	26,9	27,2	27,4	27,7	(±)1,0
		164-170	27,8	28,1	28,4	28,6	28,9	29,2	29,4	29,7	
		176-182	28,8	29,1	29,4	29,6	29,9	30,2	30,4	30,7	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,5	23,3	24,0	24,7	25,4	26,0	26,7	27,3	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	20,8	21,4	22,0	22,6	23,2	23,8	24,4	25,0	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 300 из 529

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	6.7	7.0	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12.6	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.8	14.2	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана внизу, см	все роста	21.6	22.4	21.2	21.3	22.0	22.5	22.5	22.6	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	152-158	19.5	19.5	19.5	19.7	19.8	19.9	20.0	20.1	(+/ -) 0,3
		164-170	21.5	21.5	21.5	21.7	21.8	21.9	22.0	22.1	
		176-182	21.5	21.5	21.5	21.7	21.8	21.9	22.0	22.1	
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	70.8	72.0	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0	78.0	(+/-)0.5

В85. Блуза медицинская женская модель 354Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бёдер, полуприлегающего силуэта, с овальным вырезом горловины, обработанным обтачкой.

Перед с центральной супатной бортовой застёжкой на 7 обмётанных петель и 7 пуговиц; с отрезными кокетками; с декоративными листочками шириной 1,2 см в швах притачивания кокеток; с вертикальными рельефами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа; с двумя большими накладными карманами от застёжки до боковых швов. Нижние края карманов входят в подгибку низа изделия, а верхние обработаны обтачками. Края бортов должны быть обработаны планками шириной 3,6см.

Спинка с закруглёнными рельефами, выходящими из верхней части пройм и доходящими до низа изделия.

Рукава втачные, одношовные, короткие. Низ рукавов оформлен притачными отложными манжетами шириной 3,5 см.

Декоративные листочки должны быть выполнены из отделочной ткани контрастного цвета.

По верху карманов на уровне рельефов должны быть установлены закрепки на спецмашине длиной 0,8 см нитками в тональном сочетании с цветом отделочной ткани.

По горловине и верху карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 3,8 см.

По рельефам, кокеткам, боковым краям листочек и низу изделия проложена строчка на расстоянии 0,1 см от края или шва.

В качестве фурнитуры используются прозрачные пуговицы диаметром 1,6 см.

Нитки используются в тональном сочетании с цветом основной и отделочной тканей.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 301 из 529



Рисунок В85—Блуза медицинская женская модель 354Б

Таблица В85.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 354Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет. кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Кокетка полочки	2	1
4	Спинка	1	0
5	Бочок спинки	2	1
6	Планка застежки левой полочки	1	0
7	Планка застежки правой полочки	1	0
8	Рукав	2	1
9	Манжета	2	1
10	Карман	2	1
11	Обтачка кармана	2	1
12	Обтачка горловины полочки	2	1
13	Обтачка горловины спинки	1	0
	Отделочная ткань		
14	Листочка	2	1
15	Отделочная деталь на спинку	1	0
	Итого:	25	10

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-
2023, ред.2

Таблица В85.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 354Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	62.2 66.2 68.2	62.4 66.4 68.4	62.6 66.6 68.6	62.8 66.8 68.8	63.2 67.2 69.2	63.4 67.4 69.4	63.6 67.6 69.6	63.8 67.8 69.8	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35.2	36.0	36.7	37.5	38.3	39.1	39.8	40.5	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	64.4 68.4 70.4	65.0 69.0 71.0	65.6 69.6 71.6	66.2 70.2 72.2	66.8 70.8 72.8	67.4 71.4 73.4	68.0 72.0 74.0	68.6 72.6 74.6	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	45.0	47.0	49.0	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	49.5	51.5	53.5	55.5	57.5	59.5	61.5	63.5	(+/-1)
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	18.0 20.1 21.0	18.2 20.2 21.2	18.5 20.5 21.5	18.8 20.8 21.8	19.1 21.1 22.1	19.4 21.4 22.4	19.7 21.7 22.7	20.0 22.0 23.0	(+/-0.5)
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17.0	17.6	18.3	19.0	19.6	20.3	21.0	21.7	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16.2	16.8	17.4	18.0	18.7	19.4	20.0	20.7	(+/-0.5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	13.2	14.1	15.0	15.9	16.7	17.5	18.3	19.2	(+/-0.3)
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	19.5	19.6	19.6	19.7	19.7	19.7	19.8	20.0	(+/-0.3)

Продолжение Таблицы В85.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	63.9 67.9 69.9	64.0 68.0 70.0	64.2 68.2 70.2	64.3 68.3 70.3	64.4 68.4 70.4	64.5 68.5 70.5	64.8 68.8 70.8	65.2 69.2 71.2	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	41.2	42.0	42.8	43.6	44.5	45.3	46.0	46.7	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	69.2 73.2 75.2	69.8 73.8 75.8	70.4 74.4 76.4	71.0 75.0 77.0	71.6 75.6 77.6	72.4 76.4 78.4	73.2 77.2 79.2	74.0 78.0 80.0	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	65.5	67.6	69.8	72.2	74.7	77.2	79.8	83.0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	20.4 22.4 23.4	20.8 22.8 23.8	21.2 23.2 24.2	21.7 23.7 24.7	22.2 24.2 25.2	22.6 24.6 25.6	22.9 24.9 25.9	23.2 25.2 26.2	(+/-0.5)
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22.5	23.5	24.6	25.7	26.5	27.2	27.9	28.6	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	21.5	22.5	23.6	24.7	25.7	26.4	27.0	27.5	(+/-0.5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	20.1	21.0	22.0	23.2	24.3	25.3	26.5	27.5	(+/-0.3)
10	Глубина нижнего кармана, см	все роста	20.0	20.1	20.1	20.2	20.2	20.2	20.2	20.3	(+/-0.3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 303 из 529

В86. Блуза медицинская женская модель 355Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер, прямого силуэта, умеренного объема; без воротника, с круглым вырезом горловины, обработанным обтачкой; с карманами в боковых швах.

Перед с отрезной кокеткой и нижней частью, состоящей из двух запахивающихся полочек с закругленными нижними углами; с двумя горизонтальными нагрудными вытачками; с одним верхним карманом, обработанным справа в шве притачивания кокетки. Мешковины боковых карманов должны быть полностью настроены на полочки сквозными строчками. Запах полочек должен закрепляться до линии талии четырьмя закрепками, установленными на спецмашине. В углах верхнего и боковых карманов должны быть закрепки, установленные на спецмашине.

Спинка с отрезной кокеткой и средним швом. В среднем шве до линии притачивания кокетки должен быть обработан разрез, вверху которого в правую часть кокетки вшита фигурная пата, пристегивающаяся к левой части кокетки с помощью кнопки.

Рукава втачные, двухшовные, с нижними и средними швами, длиной 3/4. В средних швах должны быть обработаны разрезы с вшитыми в них над подгибкой передних частей фигурными патами, пристегивающимися к задним частям с помощью кнопок.

По краям бортов, пат, разрезов, горловины, по низу изделия, швам притачивания кокеток и средним швам рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,8-3,0 см.

В качестве фурнитуры должны использоваться кнопки диаметром 1,1-1,3 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани и контрастного цвета для закрепок карманов.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

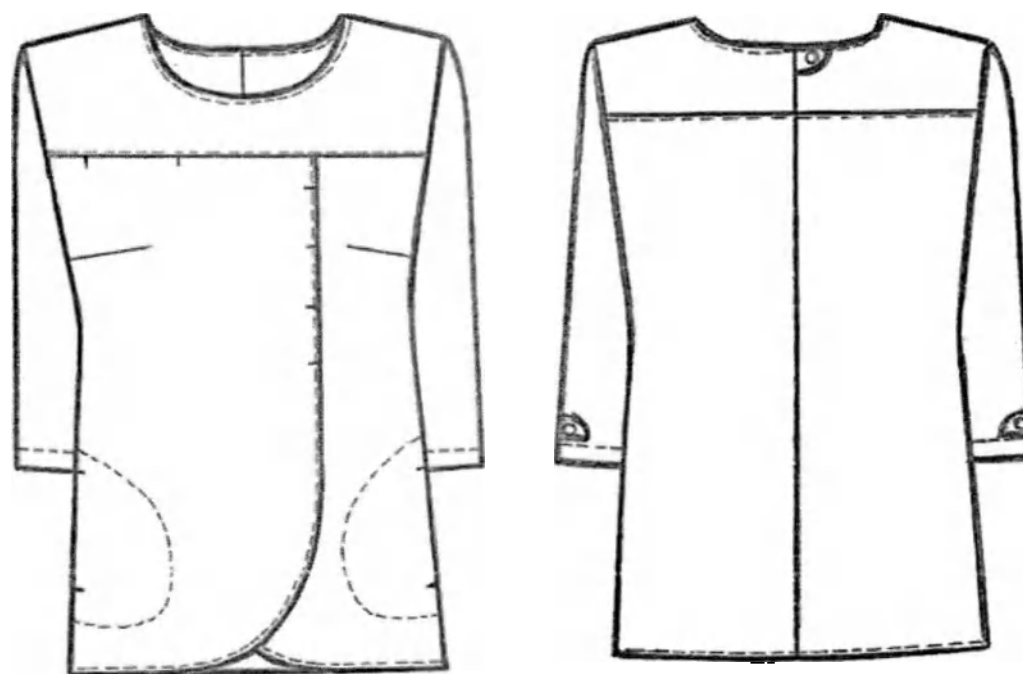


Рисунок В86—Блуза медицинская женская модель 355Б

Таблица В86.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 355Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Кокетка полочки	1	0
3	Спинка	2	1
4	Кокетка спинки	2	1
5	Передняя часть рукава	2	1
6	Задняя часть рукава	2	1
7	Пата	6	3
8	Мешковина верхнего кармана	2	1
9	Мешковина нижнего кармана	4	2
10	Обтачка горловины переда	1	0
11	Обтачка горловины спинки	2	1
	Итого:	26	12

Таблица В86.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 355Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	69,0	69,2	69,3	69,5	69,8	70,1	70,3	70,4	(±1)
		164-170	73,0	73,2	73,3	73,5	73,8	74,1	74,3	74,4	
		176-182	75,0	75,2	75,3	75,5	75,8	76,1	76,3	76,4	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,4	36,2	37,0	37,8	38,6	39,4	40,4	41,2	(±0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	73,0	73,6	74,2	74,7	75,3	75,9	76,5	77,2	(±1)
		164-170	77,0	77,6	78,2	78,7	79,3	79,9	80,5	81,2	
		176-182	79,0	79,6	80,2	80,7	81,3	81,9	82,5	83,2	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	(±1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	(±1)
6	Длина рукава, см	152-158	40,0	40,2	40,4	40,6	40,8	41,0	41,1	41,2	(±1,0)
		164-170	43,0	43,2	43,4	43,6	43,8	44,0	44,1	44,2	
		176-182	44,5	44,7	44,9	45,1	45,3	45,5	45,6	45,7	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,1	17,7	18,3	18,9	19,5	20,1	20,9	21,6	(±0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	14,7	15,0	15,3	15,7	16,0	16,3	16,7	17,0	(±0,5)
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	10,8	(±0,3)
10	Длина входа нижнего кармана, см	все роста	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,5	15,5	(±0,5)

Продолжение Таблицы В86.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	70,6	71,2	71,6	72,2	72,8	73,2	73,8	74,5	(±1)
		164-170	74,6	75,2	75,6	76,2	76,8	77,2	77,8	78,5	
		176-182	76,6	77,2	77,6	78,2	78,8	79,2	79,8	80,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	42,0	42,6	43,2	43,8	44,6	45,4	46,2	47,0	(±0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	78,0	78,9	79,8	81,0	82,5	83,7	85,0	86,5	(±1)
		164-170	82,0	82,9	83,8	85,0	86,5	87,7	89,0	90,5	
		176-182	84,0	84,9	85,8	87,0	88,5	89,7	91,0	92,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	62,0	64,0	66,0	68,2	70,4	72,6	74,8	77,0	(±1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	66,5	68,5	70,5	72,7	74,9	77,2	79,5	82,0	(±1)
6	Длина рукава, см	152-158	41,5	41,7	41,9	42,1	42,3	42,4	42,6	42,8	(±1,0)
		164-170	44,5	44,7	44,9	45,1	45,3	45,4	45,6	45,8	
		176-182	46,0	46,2	46,4	46,6	46,8	46,9	47,1	47,3	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,3	23,0	23,7	24,4	25,2	26,0	27,0	28,0	(±0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	17,4	17,8	18,2	18,6	19,0	19,4	19,9	20,5	(±0,5)
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	11,3	11,3	(±0,3)
10	Длина входа нижнего кармана, см	все роста	15,5	15,5	15,5	16,0	16,0	16,5	16,5	16,5	(±0,5)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 306 из 529

В87. Блуза медицинская женская модель 356Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер, слегка приталенная, с зауженной линией плеч; С застежкой-«молнией» в среднем шве спинки, заходящей на воротник.

Перед с косыми нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов; с углообразным подрезом, выходящим из левой части горловины, заходя на воротник, и заканчивающимся ниже линии талии в левом боковом шве. Края угла отлетные, обработаны широкой обтачкой. Правая сторона переда отрезная по линии талии, в шве заложены по 2 мягкие складки, застроченные на длину 1,5 см на верхней и нижней частях правой стороны переда. С правой стороны должен быть обработан нижний боковой карман прямоугольной формы.

Спинка со средним швом, косыми плечевыми вытачками, с эластичной тесьмой шириной 4,0 см, настроенной с внутренней стороны по линии талии двумя строчками с расстоянием 3,5-3,7 см между ними.

Рукава втачные одношовные, с четырьмя вытачками по окату на каждом рукаве.

Воротник-стойка шириной 3,4-4,0 см по спинке и по переду справа. Левая часть воротника от подреза до плечевого шва-цельновыкроеная, с косой вытачкой из края воротника.

По шву втачивания воротника и швам настрачивания кармана должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от шва.

По верхнему краю кармана, низу изделия и низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,3-2,5 см от края.

Вдоль сторон углового подреза должна быть проложена строчка на расстоянии 3,9-4,1 см от края.

В качестве фурнитуры должна использоваться потайная тесьма-«молния» длиной 20 см в тональном сочетании с цветом ткани.

Нитки для изготовления изделия должны использоваться в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

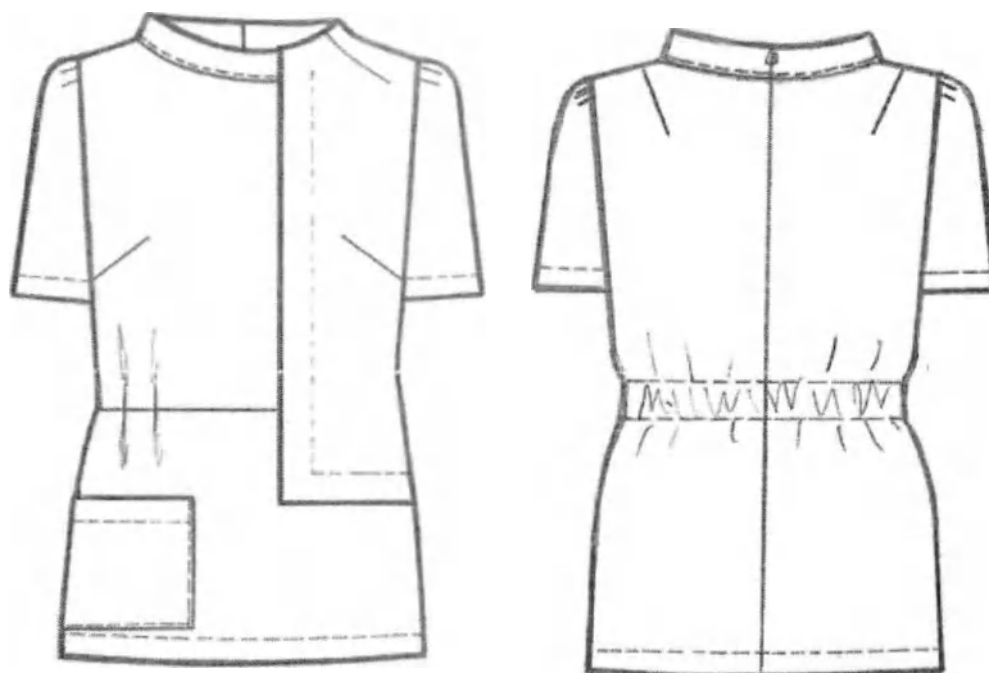


Рисунок В87–Блуза медицинская женская модель 356Б

Таблица В87.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 356Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Правая верхняя часть переда	1	0
2	Левая часть переда	1	0
3	Нижняя часть переда	1	0
4	Спинка	2	1
5	Рукав	2	1
6	Передний воротник	2	1
7	Задний воротник	4	2
8	Карман	1	0
9	Обтачка углового подреза	1	0
10	Обтачка левой стороны горловины	1	0
	Итого:	16	5

Таблица В87.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 356Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	63,4 67,4 69,4	63,5 67,5 69,5	63,6 67,6 69,6	63,7 67,7 69,7	64,1 68,1 70,1	64,5 68,5 70,5	64,7 68,7 70,7	64,9 68,9 70,9	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	31,2	32,0	32,8	33,7	34,6	35,5	36,2	36,8	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	65,8 69,8 71,8	66,5 70,5 72,5	67,0 71,0 73,0	67,5 71,5 73,5	68,2 72,2 74,2	69,4 73,4 75,4	70,0 74,0 76,0	70,8 74,8 76,8	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	(+/-1)
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	23,6 25,6 26,6	23,7 25,7 26,7	23,8 25,8 26,8	23,9 25,9 26,9	24,0 26,0 27,0	24,3 26,3 27,3	24,7 26,7 27,7	24,8 26,8 27,8	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	16,2	16,8	17,6	18,5	19,1	19,7	20,3	21,0	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,8	16,3	17,0	17,8	18,5	19,0	19,6	20,2	(+/-0,5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	15,5	15,7	16,2	16,7	17,0	17,3	17,5	17,5	(+/-0,3)
10	Глубина нижнего кармана посередине, см	все роста	17,0	17,0	17,0	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	(+/-0,3)

Продолжение Таблицы В87.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	65,1 69,1 71,1	65,7 69,7 71,7	66,3 70,3 72,3	66,7 70,7 72,7	67,0 71,0 73,0	67,6 71,6 73,6	68,0 72,0 74,0	68,3 72,3 74,3	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	37,5	38,3	39,1	39,9	40,7	41,5	42,2	43,0	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	71,6 75,6 77,6	72,6 76,6 78,6	73,6 77,6 79,6	74,6 78,6 80,6	75,6 79,6 81,6	76,7 80,7 82,7	77,8 81,8 83,8	79,0 83,0 85,0	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	62,0	64,0	66,0	68,2	70,4	72,6	74,8	77,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	65,5	67,5	69,5	71,7	73,9	76,2	78,5	81,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	24,9 26,9 27,9	25,1 27,1 28,1	25,3 27,3 28,3	25,6 27,6 28,6	25,7 27,7 28,7	26,0 28,0 29,0	26,5 28,5 29,5	27,0 29,0 30,0	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	21,6	22,2	23,0	23,8	24,7	25,6	26,6	27,6	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	20,9	21,6	22,4	23,2	24,1	24,9	25,9	26,9	(+/-0,5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	18,0	18,0	18,5	18,5	18,5	19,0	19,0	19,0	(+/-0,3)
10	Глубина нижнего кармана посередине, см	все роста	17,6	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	(+/-0,3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В88. Блуза медицинская женская модель 357-1Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская прямого силуэта, умеренного объёма, длиной ниже линии бёдер; с притачной кокеткой: на спинке выше уровня лопаток, а на передё шириной 4,0 см; с разрезами в боковых швах. Спинка длиннее переда на 7,0 см, с плавным переходом длины. Без воротника, с V-образным вырезом горловины, обработанным планками шириной 2,8-3,0 см, плавно переходящими в планки под застёжку и доходящими до низа.

Перед с центральной бортовой застёжкой на 6 кнопок; с дугообразными подрезами, выходящими из швов притачивания планок застёжки ниже линии груди и заканчивающимися в боковых швах под проймой; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокетки и заканчивающимися в швах подрезов; с одним верхним и двумя нижними накладными карманами фигурной формы. Верхние края карманов должны быть обработаны широкой подгибкой. На правом нижнем кармане в переднем углу должна быть треугольная вставка. Под подгибку верхнего и правого нижнего карманов должна быть вшита декоративная деталь в виде шлевки, в которую продето металлическое полукольцо.

Спинка со средним швом.

Рукава втачные, одношовные, длиной до локтя или длиной 3/4 (по желанию заказчика). Низ рукавов должен быть оформлен притачными манжетами шириной 2,8-3,0 см.

По кокетке, подрезам, рельефам, краям планок, шлевок, разрезам, швам притачивания манжет, планок и швам настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 0,7-0,8 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки 1,0-1,2 см.

Нитки должны использоваться в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.



Рисунок В88—Блуза медицинская женская модель 357-1Б

Таблица В88.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 357-1Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Нижняя часть полочки	2	1
4	Спинка	2	1
5	Кокетка	1	0
6	Рукав	2	1
7	Манжета	2	1
8	Верхний карман	1	0
9	Нижний карман	2	1
10	Отделка правого кармана	1	0
11	Планка застежки	4	2
12	Шлевки	1	0
	Итого:	22	9

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 311 из 529

Таблица В88.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 357-1Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	73.6	74.0	74.3	74.7	75.0	75.2	75.4	75.6	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	35.5	36.8	37.8	38.6	39.8	40.8	41.7	42.4	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	70.7	71.2	71.7	72.1	72.6	73.2	73.8	74.4	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0	60.0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0	63.2	65.4	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	42.9	43.2	43.4	43.6	43.8	44.0	44.2	44.5	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	18.3	18.8	19.3	19.9	20.4	21.0	21.7	22.4	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	15.0	15.4	15.8	16.3	16.7	17.2	17.7	18.2	(+/-0.5)
9	Ширина верхнего кармана по низу, см	164-170	8.6	8.6	8.7	8.8	9.3	9.3	9.7	9.7	(+/-0.3)
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	164-170	11.6	11.6	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	(+/-0.3)
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	15.3	15.3	16.1	16.1	17.0	17.0	18.0	18.0	(+/-0.3)
12	Глубина нижнего кармана, см	164-170	16.3	16.3	17.0	17.0	17.6	17.6	18.0	18.0	(+/-0.3)

Продолжение Таблицы В88.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	75.8	76.0	76.4	76.7	77.1	77.4	77.7	77.9	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	43.2	44.0	44.6	45.2	46.0	46.8	47.6	48.4	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	75.1	75.9	76.7	77.5	78.3	79.2	80.1	81.0	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	72.0	74.0	76.0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	67.6	69.8	72.0	74.2	76.4	78.6	80.8	83.0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	44.7	45.0	45.3	45.6	45.8	45.9	46.1	46.2	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	23.0	23.6	24.3	25.0	25.8	26.5	27.2	27.9	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	18.6	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	(+/-0.5)
9	Ширина верхнего кармана по низу, см	164-170	10.2	10.3	10.5	11.0	11.0	11.1	11.7	12.2	(+/-0.3)
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	164-170	12.0	12.0	12.0	12.0	12.2	12.5	12.5	12.5	(+/-0.3)
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	19.0	19.0	20.0	20.0	20.5	21.0	21.0	21.0	(+/-0.3)
12	Глубина нижнего кармана, см	164-170	18.0	18.2	18.6	18.6	19.4	19.8	19.8	19.8	(+/-0.3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 312 из 529

В89. Блуза медицинская женская модель 357-2Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская прямого силуэта, умеренного объёма, длиной ниже линии бёдер; с притачной кокеткой: на спинке выше уровня лопаток, а на передё шириной 4,0 см; с разрезами в боковых швах. Спинка длиннее переда на 7,0 см, с плавным переходом длины. Вырез горловины V-образный, обработан планками шириной 2,8-3,0 см, плавно переходящими в планки под застёжку и доходящими до низа изделия.

Перед с центральной бортовой застёжкой на 6 кнопок или 6 обметанных петель и 6 пуговиц; с дугообразными подрезами, выходящими из швов притачивания планок застёжки ниже линии груди и заканчивающимися в боковых швах под проймой; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокетки и заканчивающимися в швах подрезов; с двумя нижними накладными карманами фигурной формы. Верхние края карманов должны быть обработаны подгибкой шириной 2,9-3,1 см, застроченной на лицо.

Спинка со средним швом.

Рукава втачные, одношовные, длиной до локтя. Низ рукавов должен быть оформлен притачными манжетами шириной 2,8-3,0 см.

Воротник отложной, вшитый в шов обтачивания планок горловины.

По кокетке, подрезам, рельефам, краям планок, разрезов, воротника, швам притачивания манжет, планок и швам настрачивания карманов должны быть проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 0,7-0,8 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,0-1,2 см или пластмассовые пуговицы.

Нитки должны использоваться в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.

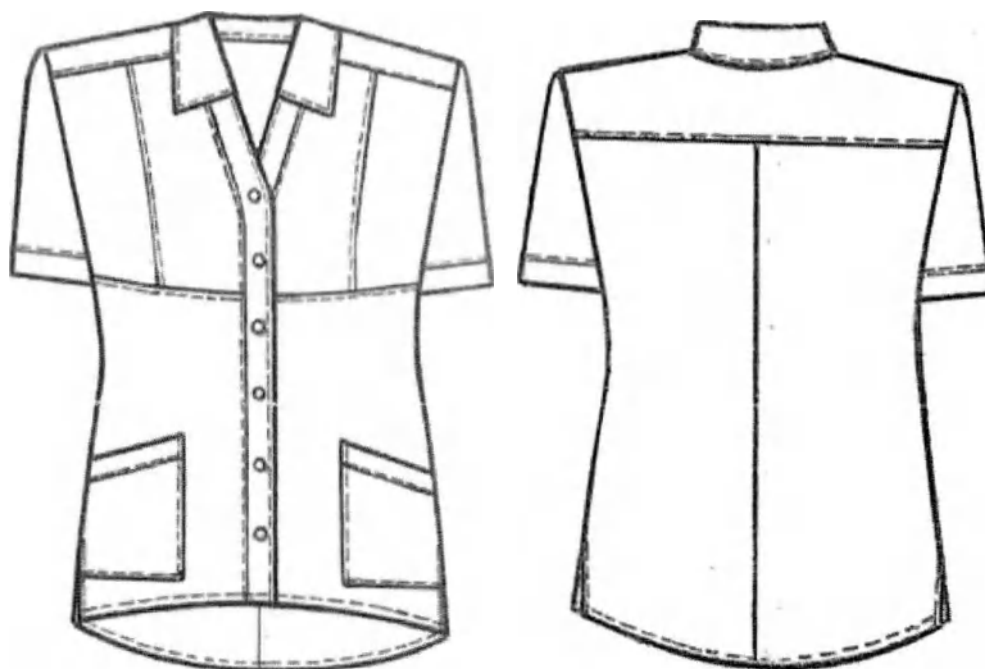


Рисунок В89–Блуза медицинская женская модель 357-2Б

2Б

Таблица В89.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 357-

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Нижняя часть полочки	2	1
4	Спинка	2	1
5	Кокетка	1	0
6	Рукав	2	1
7	Манжета	2	1
8	Воротник	2	1
9	Карман	2	1
10	Планка застежки	4	2
	Итого:	21	10

Таблица В89.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 357-2Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	73,6	74,0	74,3	74,7	75,0	75,2	75,4	75,6	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	35,5	36,8	37,8	38,6	39,8	40,8	41,7	42,4	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	70,7	71,2	71,7	72,1	72,6	73,2	73,8	74,4	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,2	65,4	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	31,2	31,5	31,7	32,0	32,2	32,5	32,8	33,1	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	18,3	18,8	19,3	19,9	20,4	21,0	21,7	22,4	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	16,9	17,4	17,8	18,3	18,7	19,3	19,9	20,6	(+/-0,5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	15,3	15,3	16,1	16,1	17,0	17,0	18,0	18,0	(+/-0,3)
10	Глубина нижнего кармана, см	164-170	16,3	16,3	17,0	17,0	17,6	17,6	18,0	18,0	(+/-0,3)
11	Длина воротника по отлету, см	164-170	44,6	45,4	46,2	47,0	47,8	48,6	49,4	50,2	(+/-0,5)

Продолжение Таблицы В89.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	75,8	76,0	76,4	76,7	77,1	77,4	77,7	77,9	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	43,2	44,0	44,6	45,2	46,0	46,8	47,6	48,4	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	75,1	75,9	76,7	77,5	78,3	79,2	80,1	81,0	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	67,6	69,8	72,0	74,2	76,4	78,6	80,8	83,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	33,4	33,7	33,9	34,1	34,3	34,5	34,7	35,0	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	23,0	23,6	24,3	25,0	25,8	26,5	27,2	27,9	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	21,2	21,8	22,4	23,0	23,6	24,2	24,8	25,4	(+/-0,5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	19,0	19,0	20,0	20,0	20,5	21,0	21,0	21,0	(+/-0,3)
10	Глубина нижнего кармана, см	164-170	18,0	18,2	18,6	18,6	19,4	19,8	19,8	19,8	(+/-0,3)
11	Длина воротника по отлету, см	164-170	51,0	51,9	52,8	53,7	54,6	55,4	56,2	57,0	(+/-0,5)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 315 из 529

В90. Блуза медицинская женская модель 358Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер, полуприлегающего силуэта; без воротника, с асимметричным V-образным вырезом горловины, обработанным обтачкой; с разрезами в боковых швах.

Перед с двумя горизонтальными нагрудными вытачками; с косым подрезом, выходящим из угла горловины и являющимся продолжением её правой стороны и заканчивающимся в левом боковом шве в области талии; сверху в шве притачивания подреза обработан разрез длиной 10-12 см для застежки. Застежка обработана в нижнем углу горловины на 1 навесную петлю из ткани, пришитую к левой верхней части переда, и 1 пуговицу, пришитую к правой верхней части переда. С левой стороны в шве нижнего косого подреза, выходящего из правого бокового шва выше линии талии и заканчивающегося в левом боковом шве выше линии бедер, обработан карман. Карман застегивается на 1 навесную петлю из ткани, вшитую в шов нижнего подреза на уровне середины кармана, и 1 пуговицу, пришитую на нижнюю часть переда под петлей.

Спинка со средним швом; с центральной застежкой на потайную тесьму-«молнию»; с рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа.

Рукава втачные, двухшовные (с нижними и средними швами), короткие. В нижней части средних швов обработаны дугообразные разрезы, а на высоте 2-2,2 см от низа рукавов пришиты по 1 навесной петле из ткани (на передних частях рукавов) и по 1 пуговице (на задних частях). Низ рукавов подшит швом вподгибку с закрытым срезом, строчка проходит на расстоянии 1,8-2,0 см от подогнутого края.

Нижняя часть переда и навесные петли могут быть выполнены из отделочной ткани.

По вырезу горловины, рельефам, подрезам, краям разрезов и средним швам рукавов проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

Низ изделия подшит швом вподгибку с закрытым срезом, строчка должна проходить на расстоянии 1,8-2,0 см. от подогнутого края.

В качестве фурнитуры используется потайная тесьма-«молния» длиной 50-60 см, металлические пуговицы диаметром 18 мм – для горловины и кармана, диаметром 15 мм – для рукавов.

Блуза может быть выполнена в одном цвете, либо комбинированная из тканей двух цветов.

Нитки для изготовления изделия должны использоваться в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 316 из 529

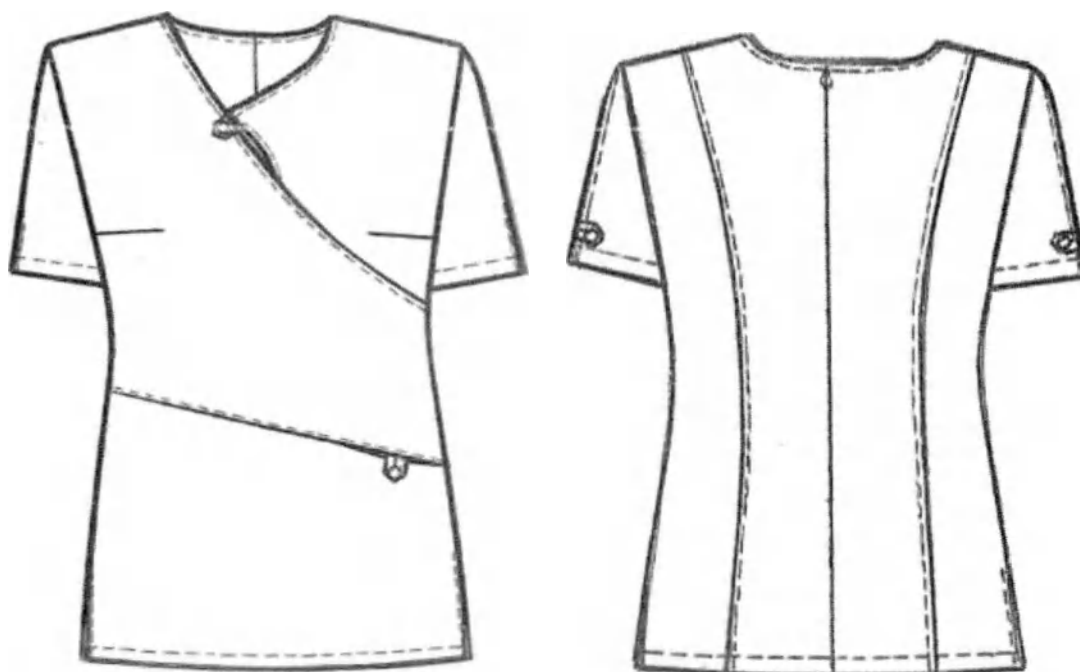


Рисунок В90—Блуза медицинская женская модель 358Б

Таблица В90.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 358Б

Таблица Б-16.1 Спецификация деталей кроя блузы модифицированная женская модель 3302				
№	Наименование деталей кроя	Кол-во деталей кроя		Кол-во зеркальн о
		Однотонны е	Комбинированн ые	
	Основная ткань			
1	Правая верхняя часть переда	1	1	0
2	Левая верхняя часть переда	1	1	0
3	Нижняя часть переда	1	-----	0
4	Центральная часть спинки	2	2	1
5	Бочок спинки	2	2	1
6	Передняя часть рукава	2	2	1
7	Задняя часть рукава	2	2	1
8	Обтачка разреза рукава	4	4	2
9	Левая обтачка горловины переда	1	1	0
10	Правая обтачка горловины персда	1	1	0
11	Обтачка горловины спинки	2	2	1
12	Мешковина кармана	2	-----	1
13	Петли	1	-----	0
	Отделочная ткань			
14	Нижняя часть переда	-----	1	0
15	Мешковина кармана	-----	2	1
16	Петли	-----	1	0
	ИТОГО	22	22	8

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Таблица В90.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 358Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	60,6	60,8	61,0	61,3	61,6	61,9	62,2	62,3	(±/-1)
		164-170	64,6	64,8	65,0	65,3	65,6	65,9	66,2	66,3	
		176-182	66,6	66,8	67,0	67,3	67,6	67,9	68,2	68,3	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	33,5	34,5	35,6	36,7	38,0	38,6	39,5	40,4	(±/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	64,4	65,2	66,0	66,8	67,5	68,2	69,0	69,6	(±/-1)
		164-170	68,4	69,2	70,0	70,8	71,5	72,2	73,0	73,6	
		176-182	70,4	71,2	72,0	72,8	73,5	74,2	75,0	75,6	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,2	46,2	48,2	50,2	52,2	54,2	56,2	58,2	(±/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	50,0	52,0	54,0	56,2	58,5	60,8	63,1	65,4	(±/-1)
6	Длина рукава, см	152-158	24,0	24,2	24,3	24,4	24,6	24,8	25,1	25,2	(±/-0,5)
		164-170	26,0	26,2	26,3	26,4	26,6	26,8	27,1	27,2	
		176-182	27,0	27,2	27,3	27,4	27,6	27,8	28,1	28,2	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,5	18,2	18,8	19,4	20,1	20,8	21,5	22,3	(±/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,7	19,5	20,3	(±/-0,5)
9	Длина кармана по линии входа, см	все роста	15,0	15,0	15,5	15,5	15,5	16,0	16,0	16,0	(±/-0,3)

Продолжение Таблицы В90.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	62,5	62,7	63,0	62,3	63,4	63,6	63,8	64,0	(±/-1)
		164-170	66,5	66,7	67,0	67,2	67,4	67,6	67,8	68,0	
		176-182	68,5	68,7	69,0	69,2	69,4	69,6	69,8	70,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	41,3	42,2	43,1	44,0	44,8	45,2	46,0	46,7	(±/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	70,2	70,8	71,5	72,2	72,9	73,6	74,2	74,8	(±/-1)
		164-170	74,2	74,8	75,5	76,2	76,9	77,6	78,2	78,8	
		176-182	76,2	76,8	77,5	78,2	78,9	79,6	80,2	80,8	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,2	62,2	64,2	66,2	68,2	70,2	72,2	74,2	(±/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	67,6	69,8	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	(±/-1)
6	Длина рукава, см	152-158	25,4	25,6	25,8	26,0	26,2	26,4	26,6	26,8	(±/-0,5)
		164-170	27,4	27,6	27,8	28,0	28,2	28,4	28,6	28,8	
		176-182	28,4	28,6	28,8	29,0	29,2	29,4	29,6	29,8	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	23,1	23,8	24,5	25,2	25,9	26,8	27,5	28,2	(±/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	21,1	21,7	22,3	23,0	23,6	24,2	24,8	25,4	(±/-0,5)
9	Длина кармана по линии входа, см	все роста	16,0	16,5	16,5	16,5	17,0	17,0	17,0	17,0	(±/-0,3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 318 из 529

В91. Блуза медицинская женская модель 358-1Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер, прямого силуэта, умеренного объема; без воротника, с асимметричным V-образным вырезом горловины, обработанным обтачкой; с разрезами в боковых швах.

Перед с двумя горизонтальными нагрудными вытачками; с косым подрезом, выходящим из угла горловины и являющимся продолжением её правой стороны и заканчивающимся в левом боковом шве в области талии; вверху в шве притачивания подреза обработан разрез длиной 10-12 см для застежки. Застежка обработана в нижнем углу горловины на 1 навесную петлю из ткани, пришитую к левой верхней части переда, и 1 пуговицу, пришитую к правой верхней части переда. С левой стороны в шве нижнего косого подреза, выходящего из правого бокового шва выше линии талии и заканчивающегося в левом боковом шве выше линии бедер, обработан карман.

Спинка со средним швом.

Рукава втачные, одношовные, короткие (выше локтя).

Верхняя левая часть переда и навесная петля могут быть выполнены из отделочной ткани.

По вырезу горловины, подрезам и краям разрезов должны быть проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

Низ изделия обработан швом вподгибку с закрытым срезом, строчка должна проходить на расстоянии 1,3-1,5 см от подогнутого края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические пуговицы диаметром 1,8 см.

Блуза может быть выполнена в одном цвете, либо комбинированная из тканей двух цветов.

Нитки для изготовления изделия должны использоваться в тональном сочетании с цветом основной и отделочной тканей.


Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

Рост: 164-170.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 319 из 529

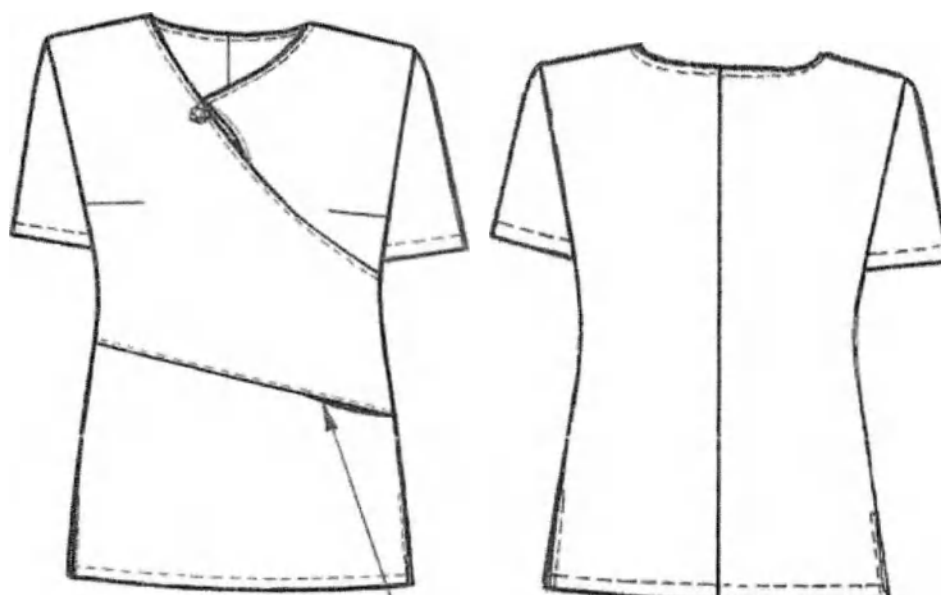

карман в шве

Рисунок В91–Блуза медицинская женская модель 358-1Б

Таблица В91.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 358-1Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Верхняя правая часть переда	1	0
2	Нижняя часть переда	1	0
3	Спинка	2	1
4	Рукав	2	1
5	Мешковина кармана	2	1
6	Правая обтачка горловины переда	1	0
7	Обтачка горловины спинки	1	0
	Отделочная ткань		
8	Верхняя левая часть переда	1	0
9	Левая обтачка горловины переда	1	0
10	Петля	1	0
	ИТОГО	13	3

Таблица В91.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 358-1Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер						Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	64,5	64,7	64,9	65,2	65,5	65,8	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	35,6	36,4	37,2	38,0	38,8	39,6	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	67,4	68,2	69,0	69,8	70,5	71,2	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	46,8	48,8	50,8	52,8	54,8	56,8	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	49,4	51,5	53,6	55,8	58,0	60,2	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	24,7	24,8	24,9	25,1	25,4	25,6	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	17,5	18,2	18,8	19,4	20,0	20,6	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	16,4	17,0	17,5	18,1	18,7	19,3	(+/-0,5)
9	Длина кармана по линии входа, см	164-170	14,5	14,5	15,5	15,5	15,5	16,0	(+/-0,5)

Продолжение Таблицы В91.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер						Допуск, см
			52	54	56	58	60	62	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	66,1	66,2	66,4	66,7	66,9	67,1	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	40,4	41,1	41,8	42,4	43,0	43,6	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	72,0	72,6	73,2	73,8	74,5	75,2	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	58,8	60,8	62,8	64,8	66,8	68,8	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	62,4	64,6	66,8	69,0	71,2	73,4	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	25,9	26,1	26,3	26,5	26,7	26,9	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	21,3	22,0	22,6	23,2	23,8	24,5	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	19,9	20,5	21,2	21,8	22,5	23,2	(+/-0,5)
9	Длина кармана по линии входа, см	164-170	16,0	16,0	16,0	16,0	16,5	16,5	(+/-0,5)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 321 из 529

В92. Блуза медицинская женская модель 359Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер, полуприлегающего силуэта, с разрезами в боковых швах. Горловина изделия оформлена цельновыкроенной стойкой и обработана обтачкой.

Перед со средним швом; двумя наклонными вытачками, выходящими из горловины; двумя косыми подрезами, выходящими из среднего шва, проходящими через центр груди и заканчивающимися в боковых швах ниже линии проймы; двумя косыми подрезами, выходящими из среднего шва ниже линии талии и заканчивающимися в боковых швах; с двумя карманами в швах нижних разрезов; с двумя рельефными швами, выходящими из верхних разрезов и заканчивающимися в нижних. По краям входов в карманы выполнены закладки длиной 0,8 см.

Спинка со средним швом; двумя наклонными вытачками, выходящими из горловины; с застежкой на потайную тесьму-«молнию» в среднем шве; с косыми подрезами, выходящими из боковых швов ниже линии проймы, являясь продолжением верхних разрезов переда, и сходящимися углом в среднем шве; с двумя вертикальными рельефными швами, выходящими из разрезов и доходящими до низа.

По рельефам и подрезам переда и спинки, среднему шву переда, краям разрезов и горловины проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

В боковых швах обработаны разрезы длиной 12,5-13 см.

Рукава втачные короткие. Низ рукавов подшит швом вподгибку с закрытым срезом, строчка проходит на расстоянии 2,7-2,9 см от подогнутого края. На подгибку низа левого рукава по центру закреплен металлический логотип с фирменной символикой на репсовой ленте контрастного цвета.

Низ изделия подшит швом вподгибку с закрытым срезом, строчка должна проходить на расстоянии 1,7-1,9 см. от подогнутого края.

В качестве фурнитуры используется потайная тесьма-«молния» длиной 50-60 см.

Нитки для изготовления изделия должны использоваться в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

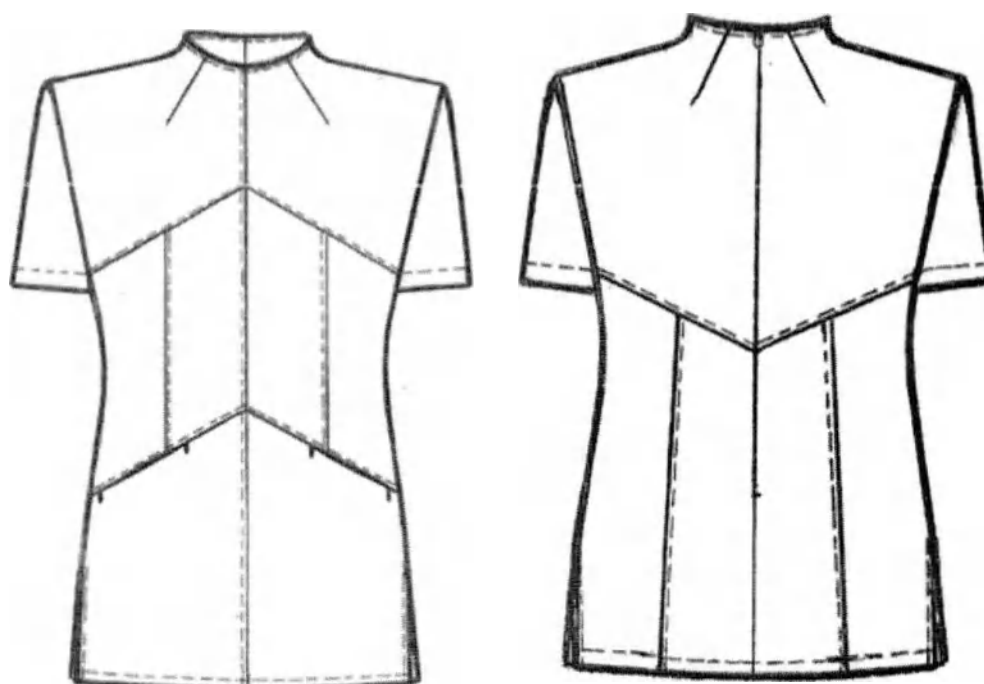


Рисунок В92–Блуза медицинская женская модель 359Б

Таблица В92.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 359Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Верхняя часть полочки	2	1
2	Средняя часть полочки	2	1
3	Боковая часть полочки	2	1
4	Нижняя часть полочки	2	1
5	Верхняя часть спинки	2	1
6	Нижняя средняя часть спинки	2	1
7	Нижняя боковая часть спинки	2	1
8	Рукав	2	1
9	Мешковина кармана	4	2
10	Обтачка горловины переда	1	0
11	Обтачка горловины спинки	2	1
	Прокладочный материал (клеевая)		
12	Обтачка горловины переда	1	0
13	Обтачка горловины спинки	2	1
	ИТОГО	26	12

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-
2023, ред.2

Страница 323 из 529

Таблица В92.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 359Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	65.8	66.0	66.2	66.5	66.8	67.1	67.4	67.7	(±1)
		164-170	71.8	72.0	72.2	72.5	72.8	73.1	73.4	73.7	
		176-182	74.8	75.0	75.2	75.5	75.8	76.1	76.4	76.7	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35.1	36.0	36.8	37.7	38.6	39.6	40.5	41.4	(±0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	66.5	67.1	68.8	68.5	69.3	70.0	70.8	71.6	(±1)
		164-170	72.5	73.1	73.8	74.5	75.3	76.0	76.8	77.6	
		176-182	75.5	76.1	76.8	77.5	78.3	79.0	79.8	80.6	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	46	48	50	52	54	56	58	60	(±1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	51.5	53.3	55.1	57.0	59.0	61.0	63.0	65.0	(±1)
6	Длина рукава, см	152-158	19.4	19.6	19.8	20.0	20.3	20.6	20.9	21.2	(±0.5)
		164-170	21.4	21.6	21.8	22.0	22.3	22.6	22.9	23.2	
		176-182	22.4	22.6	22.8	23.0	23.3	23.6	23.9	24.2	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	16.1	16.6	17.1	17.7	18.3	19.0	19.7	20.4	(±0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15.6	16.1	16.7	17.3	17.8	17.4	19.0	19.6	(±0.5)
9	Длина кармана по линии входа, см	все роста	13.5	13.5	14.6	14.6	15.6	15.6	15.6	16.6	(±0.3)

Продолжение Таблицы В92.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	68.0	68.3	68.7	69.0	69.3	69.6	69.9	70.2	(±1)
		164-170	74.0	74.3	74.7	75.0	75.3	75.6	75.9	76.2	
		176-182	77.0	77.3	77.7	78.0	78.3	78.6	78.9	79.2	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	42.3	43.1	43.9	44.7	45.5	46.3	47.0	47.7	(±0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	72.4	73.2	74.0	74.8	75.6	76.4	77.2	78.0	(±1)
		164-170	78.4	79.2	80.0	80.8	81.6	82.4	83.2	84.0	
		176-182	81.4	82.2	83.0	83.8	84.6	85.4	86.2	87.0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	62	64	66	68	70	72	74	76	(±1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	77.0	79.0	81.0	(±1)
6	Длина рукава, см	152-158	21.5	21.8	22.1	22.4	22.7	23.0	23.3	23.6	(±0.5)
		164-170	23.5	23.8	24.1	24.4	24.7	25.0	25.3	25.6	
		176-182	24.5	24.8	25.1	25.4	25.7	26.0	26.3	26.6	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	21.2	22.0	22.7	23.4	24.1	24.8	25.5	26.2	(±0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	20.2	20.8	21.4	22.0	22.6	23.2	23.8	24.4	(±0.5)
9	Длина кармана по линии входа, см	все роста	16.6	16.6	17.5	17.5	17.5	18.0	18.0	18.0	(±0.3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 324 из 529

В93. Блуза медицинская женская модель 360Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бёдер, полуприлегающего силуэта; без воротника, с овальным вырезом горловины, обработанным обтачкой.

Перед со смещённой на 5,0 см влево бортовой застёжкой на 8 кнопок; с притачными кокетками; с расходящимися к низу рельефными швами от кокеток до низа; с двумя боковыми карманами с фигурными входами, обработанными в рельефных швах ниже линии талии. Край борта правой полочки должен быть обработан планкой шириной 4,0 см, состоящей из двух частей: 1,5 см и 2,5 см

Спинка с притачной кокеткой, со слегка расходящимися к низу рельефными швами от кокетки до низа; с хлястиком шириной 3,2 см, состоящим из двух частей, вшитых одним концом в рельефные швы на уровне линии талии и скрепленных посередине спинки с помощью двух металлических полуколец, продетых в застроченную подгибку левой части хлястика.

Рукава втачные, одношовные, длиной 3/4. Низ рукавов должен быть оформлен застроченными складками шириной 3,0 см, заложенных на расстоянии 4,5 см от низа.

Мешковина кармана, видимая в его входе, и широкая часть планки должны быть выполнены из отделочной ткани №1, а узкая часть планки — из отделочной ткани №2.

По кокеткам, рельефам, краям бортов, горловины, хлястиков и входам в карманы должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,0-1,2 см и металлические полукольца шириной 3,0-3,5 см.

Нитки должны использоваться в тональном сочетании с цветом основной и отделочных тканей.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

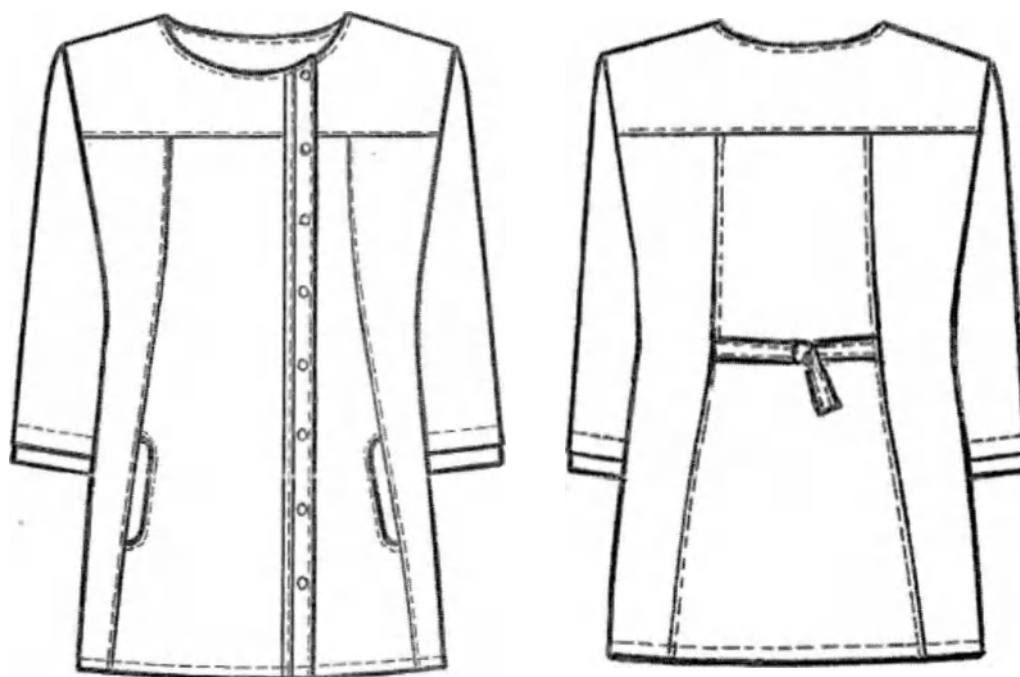


Рисунок В93—Блуза медицинская женская модель 360Б

Таблица В93.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 360Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Правая полочка	1	0
2	Левая полочка	1	0
3	Бочок полочки	2	1
4	Спинка	1	0
5	Бочок спинки	2	1
6	Кокетка правой полочки	1	0
7	Кокетка левой полочки	1	0
8	Кокетка спинки	1	0
9	Рукав	2	1
10	Правый хлястик	1	0
11	Левый хлястик	1	0
12	Мешковина кармана	2	1
13	Обтачка горловины правой полочки	1	0
14	Обтачка горловины левой полочки	1	0
15	Обтачка горловины спинки	1	0
	Отделочная ткань №1		
16	Широкая часть планки полочки	1	0
17	Мешковина кармана с бочком	2	1
	Отделочная ткань №2		
18	Узкая часть планки полочки	1	0
	Итого:	23	5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Таблица В93.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 360Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	(±1)
		164-170	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	
		176-182	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35.6	36.2	36.8	37.4	38.1	38.9	39.8	40.7	(±0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	70.4	71.0	71.6	72.2	72.8	73.3	73.8	74.4	(±1)
		164-170	74.4	75.0	75.6	76.2	76.8	77.3	77.8	78.4	
		176-182	76.4	77.0	77.6	78.2	78.8	79.3	79.8	80.4	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	45.2	47.0	48.8	50.6	52.4	54.2	56.0	57.8	(±1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0	(±1)
6	Длина рукава, см	152-158	40.0	40.1	40.2	40.3	40.4	40.5	40.6	40.7	(±0.5)
		164-170	43.0	43.1	43.2	43.3	43.4	43.5	43.6	43.7	
		176-182	44.5	44.6	44.7	44.8	44.9	45.0	45.1	45.2	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	18.3	18.8	19.3	19.7	20.2	20.7	21.2	21.7	(±0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	(±0.5)
9	Длина входа в карман, см	все роста	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	14.0	14.0	14.0	(±0.5)

Продолжение Таблицы В93.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	68.1	68.1	68.2	68.2	68.3	68.4	68.5	68.6	(±1)
		164-170	72.1	72.1	72.2	72.2	72.3	72.4	72.5	72.6	
		176-182	74.1	74.1	74.2	74.2	74.3	74.4	74.5	74.6	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	41.6	42.4	43.2	44.1	45.0	45.8	46.4	47.2	(±0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	75.1	75.8	76.5	77.2	77.9	78.6	79.3	80.0	(±1)
		164-170	79.1	79.8	80.5	81.2	81.9	82.6	83.3	84.0	
		176-182	81.1	81.8	82.5	83.2	83.9	84.6	85.3	86.0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	59.6	61.5	63.5	65.5	67.5	69.5	71.5	73.5	(±1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	66.0	68.0	70.0	72.0	74.0	76.0	78.0	80.0	(±1)
6	Длина рукава, см	152-158	40.8	40.9	41.0	41.1	41.2	41.3	41.4	41.5	(±0.5)
		164-170	43.8	43.9	44.0	44.1	44.2	44.3	44.4	44.5	
		176-182	45.3	45.4	45.5	45.6	45.7	45.8	45.9	46.0	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22.3	22.9	23.5	24.1	24.7	25.3	25.8	26.5	(±0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	19.1	19.6	20.1	20.6	21.1	21.6	22.1	22.6	(±0.5)
9	Длина входа в карман, см	все роста	14.4	14.4	14.4	14.4	15.0	15.0	15.0	15.0	(±0.5)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA¹ по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 327 из 529

В94. Блуза медицинская женская модель 361Б

Описание модели

Блуза медицинская женская из белой или гладкокрашеной ткани, длиной ниже линии бедер, прямого силуэта, умеренного объема, с разрезами в боковых швах. Изделие без воротника, с расширенным овальным вырезом горловины, обработанным притачными планками шириной 3,0-3,2 см.

Перед с косыми нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов; с горизонтальным подрезом ниже линии талии, в котором обработаны 2 боковых кармана. По краям входов в карманы должны быть закрепки, выполненные на спецмашине.

Спинка со средним швом. На середину планки горловины спинки закреплен декоративный бант, выполненный из основной ткани, под которым располагается застежка на кнопку. На спинке ниже планки горловины должен быть обработан V-образный вырез, заканчивающийся ниже уровня лопаток, края которого обработаны планками шириной 3,0-3,2 см.

Рукава втачные, одношовные, короткие (длиной выше локтя).

По краям планок переда и спинки, шву подреза переда и краям боковых разрезов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,7-2,9 см от подогнутого края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,0-1,1 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;

Рост: 164-170.



Рисунок В94—Блуза медицинская женская модель 361Б

Таблица В94.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 361Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Верхняя часть переда	1	0
2	Нижняя часть переда	1	0
3	Спинка	2	1
4	Рукав	2	1
5	Бант	1	0
6	Перемычка банта	1	0
7	Мешковина кармана	4	2
8	Планка горловины переда	2	1
9	Правая планка горловины спинки	2	1
10	Левая планка горловины	2	1
11	Планка выреза спинки	4	2
	Итого:	22	9

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 329 из 529

Таблица В94.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 361Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер						Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	68.1	68.2	68.3	68.4	68.8	69.2	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	35.9	36.8	37.6	38.4	39.3	40.2	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	70.0	70.5	71.1	71.7	72.5	73.3	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	47.0	49.0	51.0	53.0	55.0	57.0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0	60.0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	23.5	23.7	23.8	23.9	24.0	24.3	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	17.0	17.6	18.2	18.8	19.5	20.1	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	16.3	16.9	17.5	18.1	18.7	19.2	(+/-0.5)
9	Длина входа нижнего кармана, см	164-170	13.2	13.2	14.2	14.2	14.2	14.2	(+/-0.3)

Продолжение Таблицы В94.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер					Допуск, см
			52	54	56	58	60	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	69.4	69.6	69.8	70.4	71.0	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	41.0	41.7	42.5	43.2	44.0	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	74.1	74.8	75.7	76.6	77.5	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	24.5	24.7	25.0	25.2	25.8	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	20.8	21.5	22.2	22.9	23.6	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	19.8	20.4	21.1	21.8	22.6	(+/-0.5)
9	Длина входа нижнего кармана, см	164-170	14.2	15.2	15.2	15.2	15.2	(+/-0.3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 330 из 529

В95. Блуза медицинская женская модель 362Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская удлиненная, трапециевидного силуэта, расклешенная к низу. Изделие без воротника, с фигурным вырезом горловины, обработанным обтачкой; с декоративными патами шириной 3,0-3,2 см, одним концом вшитыми в проймы, а другим концом треугольной формы пристегивающимися к плечевым швам на кнопки. В боковых швах изделия должны быть обработаны карманы и разрезы. Перед изделия короче спинки на 4,0 см, низ должен быть обработан широкими обтачками.

Перед с косыми нагрудными вытачками, выходящими из пройм; с одним верхним накладным карманом фигурной формы. По верху и передней боковой стороне должна быть настрочена угловая отделочная планка шириной 1,0-1,2 см. В шов настрачивания планки на верхнюю сторону кармана должна быть закреплена декоративная металлическая фурнитура на шлевке. В углах верхнего и по краям входов в боковые карманы должны быть закрепки, установленные на спецмашине. Мешковины боковых карманов должны быть полностью настрочены на перед сквозными строчками.

Рукава втачные, длиной 3/4, состоящие из передних, задних частей и декоративных вставок-лампасов шириной 3,0-3,2 см. Передние и задние части рукавов длиннее лампасов на 4,0 см, края их посередине закруглены, а низ обработан широкими обтачками.

Декоративные паты, угловая планка верхнего кармана, лампасы рукавов и обтачка низа спинки должны быть выполнены из отделочной ткани.

По горловине, краям верхнего кармана, пат, разрезов, по швам притачивания лампасов рукавов, настрачивания планки верхнего кармана и шву настрачивания верхнего кармана на перед, по низу рукавов и низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу передних и задних частей рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 5,4-5,6 см от края.

По низу лампасов рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,4-1,6 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 3,4-3,6 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,0-1,1 см и декоративная металлическая фурнитура с отверстием для продевания шлевки.

Нитки для изготовления изделия должны использоваться в тональном сочетании с цветом основной и отделочной тканей.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

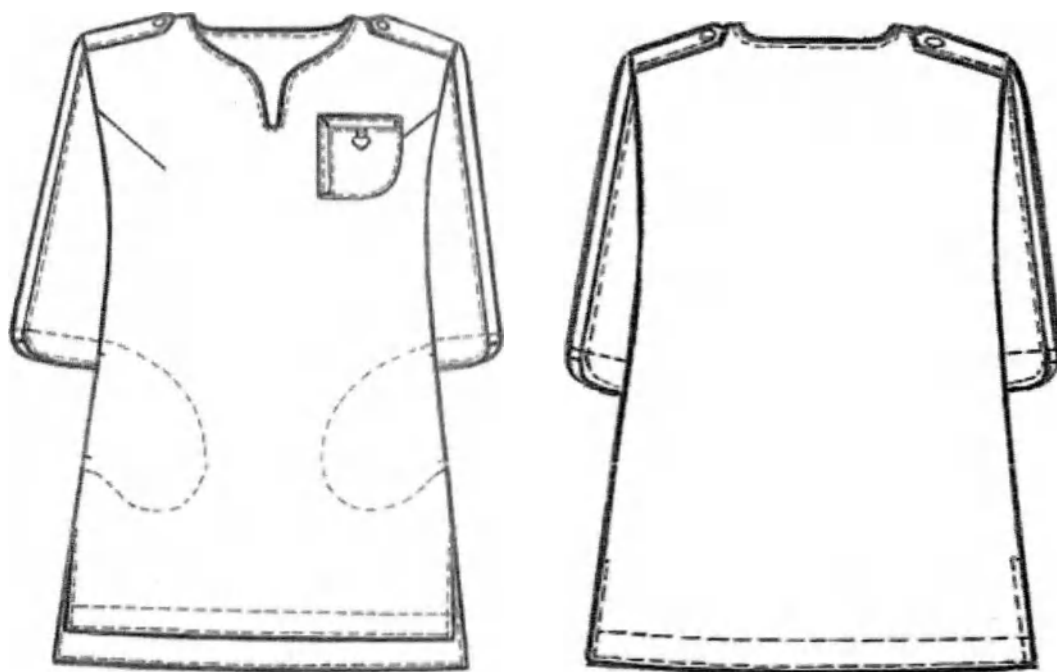


Рисунок В95–Блуза медицинская женская модель 362Б

Таблица В95.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 362Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Перед	1	0
2	Спинка	1	0
3	Передняя часть рукава	2	1
4	Задняя часть рукава	2	1
5	Верхний карман	1	0
6	Мешковина кармана	4	2
7	Обтачка горловины переда	1	0
8	Обтачка горловины спинки	1	0
9	Обтачка передней части рукава	2	1
10	Обтачка задней части рукава	2	1
11	Обтачка низа переда	1	0
Отделочная ткань			
12	Погон	4	2
13	Вставка рукава	2	1
14	Отделка кармана	2	1
15	Обтачка низа спинки	1	0
Итого:		27	10

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 332 из 529

Таблица В95.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 362Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер					Допуск см
			40	42	44	46	48	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	77,2 81,2 83,2	77,6 81,6 83,6	78,0 82,0 84,0	78,5 82,5 84,5	79,0 83,0 85,0	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	36,5	37,4	38,3	39,2	40,1	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	76,4 80,4 82,4	77,1 81,1 83,1	77,8 81,8 83,8	78,6 82,6 84,6	79,4 83,4 85,4	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	48,0	49,8	51,7	53,7	55,8	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	58,0	60,4	62,9	65,4	68,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	35,6 38,6 40,1	35,8 38,8 40,3	36,0 39,0 40,5	36,2 39,2 40,7	36,4 39,4 40,9	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	18,0	18,6	19,2	19,9	20,6	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,6	16,0	16,5	17,0	17,5	(+/-0,5)
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	9,6	9,6	9,6	10,0	10,4	(+/-0,3)
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	10,6	10,6	10,6	10,6	11,2	(+/-0,3)
11	Длина входа бокового кармана, см	все роста	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0	(+/-0,3)

Продолжение Таблицы В95.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер					Допуск см
			50	52	54	56	58	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	79,5 83,5 85,5	80,0 84,0 86,0	80,5 84,5 86,5	81,0 85,0 87,0	81,5 85,5 87,5	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	41,0	41,8	42,7	43,7	44,7	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	80,2 84,2 86,2	81,1 85,1 87,1	82,0 86,0 88,0	82,9 86,9 88,9	83,8 87,8 89,8	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	58,0	60,3	62,6	65,0	67,5	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	70,5	73,1	75,5	77,9	80,5	(+/-1)
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	36,6 39,6 41,1	36,8 39,8 41,3	37,1 40,1 41,6	37,4 40,4 41,9	37,7 40,7 42,2	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	21,3	22,0	22,7	23,4	24,1	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	18,0	18,5	19,0	19,6	20,2	(+/-0,5)
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	10,4	11,2	11,2	11,2	11,5	(+/-0,3)
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	11,2	11,3	11,3	11,3	11,5	(+/-0,3)
11	Длина входа бокового кармана, см	все роста	14,0	14,0	14,2	14,2	14,2	(+/-0,3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 333 из 529

В96. Блуза медицинская женская модель 363Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская из белой или гладкокрашеной ткани, длиной ниже линии бедер, прямого силуэта, умеренного объема; с клинообразной драпирующейся вставкой в левом боковом шве, заходящей на перед и на спинку; со съемным завязывающимся поясом шириной 4,5-4,7 см. Изделие без воротника, с овальным вырезом горловины, обработанным обтачкой.

Перед с горизонтальными нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов, с отрезной нижней частью шириной 10,0-10,3 см.

Спинка с вытачками, выходящими из горловины, со средним швом, в котором обработана застежка на потайную тесьму-«молнию», и отрезной нижней частью шириной 10,0-10,3 см.

Рукава втачные одношовные, длиной 3/4. Низ рукавов обработан манжетами шириной 9,4-9,6 см.

По низу изделия, швам притачивания манжет и нижних частей переда и спинки, а также швам втачивания клинообразной вставки должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

В качестве фурнитуры должна использоваться потайная тесьма-«молния» в тональном сочетании с цветом ткани.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.

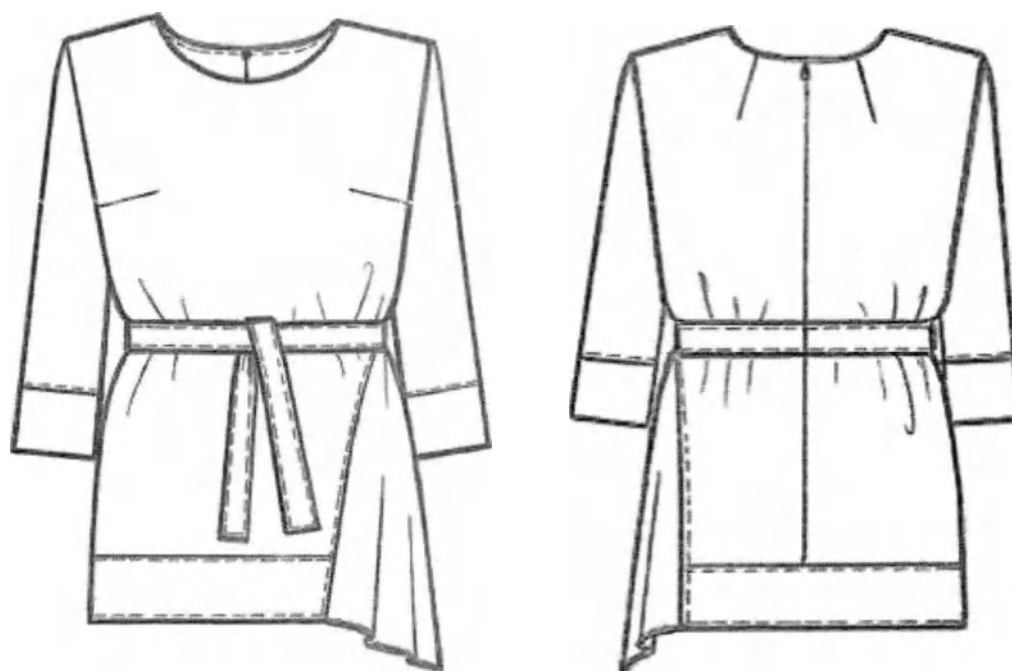


Рисунок В96–Блуза медицинская женская модель 363Б

Таблица В96.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 363Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Перед	1	0
2	Правая часть спинки	1	0
3	Левая часть спинки	1	0
4	Рукав	2	1
5	Клин	1	0
6	Нижняя часть переда	1	0
7	Нижняя часть спинки	1	0
8	Манжета	2	1
9	Пояс	2	1
10	Обтачка горловины переда	1	0
11	Обтачка горловины спинки	2	1
Прокладочный материал (клеевая)			
12	Обтачка горловины переда	1	0
13	Обтачка горловины спинки	2	1
14	Полоска под застежку-«молнию»	2	1
ИТОГО		20	6

Таблица В96.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 363Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	69,2	69,3	69,4	69,6	69,9	70,1	70,3	70,5	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	33,4	34,4	35,2	36,0	37,0	38,0	38,8	39,8	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	72,7	73,2	73,8	74,2	75,0	75,6	76,1	76,7	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	44,3	46,5	48,6	50,8	53,0	55,0	57,0	59,0	(+/-1)
5	Длина рукава, см	164-170	44,0	44,4	44,7	44,9	45,1	45,4	45,8	46,0	(+/-1)
6	Ширина рукава под проймой, см	164-170	15,3	15,9	16,4	17,1	17,9	18,4	19,3	20,1	(+/-0,5)
7	Ширина рукава внизу, см	164-170	13,6	14,0	14,3	14,7	15,1	15,6	16,1	16,8	(+/-0,5)
8	Длина пояса, см	164-170	153	159	163	167	171	175	179	183	(+/-1)

Продолжение Таблицы В96.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	70,7	71,2	71,7	72,2	72,7	73,2	73,7	74,2	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	40,6	41,4	42,4	43,2	44,2	45,2	46,2	47,2	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	77,5	78,5	79,6	80,7	81,8	82,9	84,0	85,1	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	(+/-1)
5	Длина рукава, см	164-170	46,2	46,4	46,6	46,8	47,0	47,2	47,4	47,6	(+/-1)
6	Ширина рукава под проймой, см	164-170	21,1	22,0	22,9	23,7	24,5	25,3	26,0	26,7	(+/-0,5)
7	Ширина рукава внизу, см	164-170	17,5	18,0	18,6	19,2	19,6	20,1	20,6	21,1	(+/-0,5)
8	Длина пояса, см	164-170	187	192	197	201	205	209	213	217	(+/-1)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 336 из 529

В97. Блуза медицинская женская модель 364Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская из набивной ткани длиной ниже линии бедер, прямого силуэта, умеренного объема; с V-образным вырезом горловины, обработанным спереди притачными планками шириной 3,3-3,5 см, а сзади-окантовочной бейкой контрастного цвета. Перед короче спинки на 2,5 см, в боковых швах-разрезы. В углах разрезов должны быть закрепки, установленные на спецмашине.

Перед с одним верхним накладным карманом фигурной формы и двумя нижними прямоугольными карманами. В верхних углах карманов должны быть установлены закрепки на спецмашине.

Спинка цельная.

Рукава цельновыкроенные, мягкой формы, короткие (длиной выше локтя).

Бейка для обработки горловины спинки и разрезов должна быть выкроена из отделочной ткани контрастного цвета под углом 45° . Ширина бейки в готовом виде должна составлять 0,7-0,8 см.

Вдоль швов притачивания планок и швов настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от шва.

По верхним краям карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,6-1,8 см от края.

По низу рукавов и краям разрезов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,6-0,8 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,5-1,7 см от края.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с одним из цветов набивки, а также нитки в тональном сочетании с цветом бейки для окантовывания и выполнения закрепок.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.

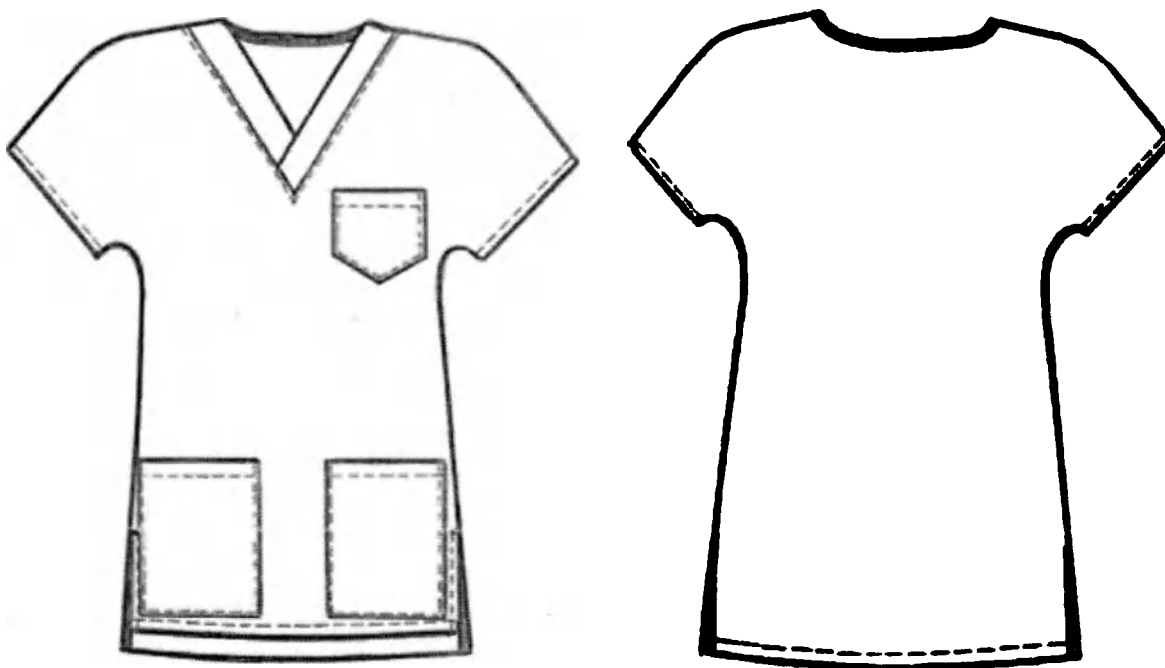


Рисунок В97–Блуза медицинская женская модель 364Б

Таблица В97.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 364Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Перед	1	0
2	Спинка	1	0
3	Верхний карман	1	0
4	Нижний карман	2	1
5	Планка горловины	2	1
Отделочная ткань			
6	Окантовочная бейка	1	0
Прокладочный материал			
7	Клеевая полоска на горловину переда (шир. 1,0 см)	2	1
Итого:		10	3

Таблица В97.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 364Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	71.0	71.2	71.3	71.5	71.8	72.2	72.4	72.6	(+/-1)
2	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	69.7	70.3	70.8	71.3	71.9	72.6	73.2	73.7	(+/-1)
3	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0	(+/-1)
4	Ширина изделия внизу, см	164-170	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0	(+/-1)
5	Длина рукава, см	164-170	26.7	27.3	27.9	28.6	29.2	30.0	30.6	31.3	(+/-0.5)
6	Ширина рукава внизу, см	164-170	19.7	20.2	20.7	21.2	21.7	22.3	23.1	23.8	(+/-0.5)
7	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	164-170	12.0	12.0	12.0	12.5	12.5	13.0	13.0	13.5	(+/-0.3)
8	Глубина верхнего кармана посередине, см	164-170	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	14.0	14.0	14.0	(+/-0.3)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	15.4	15.4	15.4	15.8	15.8	16.4	16.4	17.3	(+/-0.3)
10	Глубина нижнего кармана, см	164-170	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	17.3	(+/-0.3)

Продолжение Таблицы В97.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	72.7	73.2	73.8	74.2	74.4	74.6	74.8	75.0	(+/-1)
2	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	74.3	75.1	76.1	77.0	77.6	78.3	78.9	79.5	(+/-1)
3	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	72.0	74.0	(+/-1)
4	Ширина изделия внизу, см	164-170	66.0	68.0	70.0	72.0	74.0	76.0	78.0	80.0	(+/-1)
5	Длина рукава, см	164-170	32.0	32.6	33.2	33.8	34.4	35.0	35.6	36.2	(+/-0.5)
6	Ширина рукава внизу, см	164-170	24.3	25.0	25.7	26.4	27.1	27.8	28.5	29.2	(+/-0.5)
7	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	164-170	13.5	14.0	14.0	14.5	14.5	15.0	15.0	15.5	(+/-0.3)
8	Глубина верхнего кармана посередине, см	164-170	14.0	14.5	14.5	14.5	14.5	15.0	15.0	15.0	(+/-0.3)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	17.3	18.3	18.3	18.6	18.6	19.0	19.0	19.5	(+/-0.3)
10	Глубина нижнего кармана, см	164-170	17.3	17.5	17.5	17.8	17.8	18.0	18.0	18.2	(+/-0.3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 339 из 529

В98. Блуза медицинская женская модель 365Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бёдер, прямого силуэта, умеренного объема; с V-образным вырезом горловины, обработанным окантовочной бейкой. Линия низа фигурная, перед короче спинки на 2,0 см.

Перед с косым подрезом, выходящим из угла горловины, имитирующим запах правой части на левую и окантованным бейкой в круговую вместе с горловиной переда и спинки. На подрезе должны быть установлены 3 закрепки на спецмашине: первая на расстоянии 6-7 см от угла горловины и ещё 2 с расстоянием 5,0 см. Ниже линии талии располагаются входящие в боковые швы круглые подрезы, в которых обработаны карманы. Входы в карманы должны быть окантованы бейкой.

Спинка цельная. Для регулировки объёма на уровне линии талии должна быть настроена кулиса шириной 2,0-2,2 см, состоящая из 2 частей, входящих в боковые швы, с расстояния между ними посередине спинки 4,0 см. В каждую часть кулисы должна быть продета завязка шириной 0,8-1,0 см, выкроенная из ткани контрастного цвета.

Рукава цельновыкроенные, мягкой формы, короткие (длиной выше локтя). Низ рукавов должен быть окантован бейкой.

Бейка для обработки горловины, подрезов и низа рукавов должна быть выкроена из отделочной ткани контрастного цвета под углом 45°. Ширина бейки в готовом виде должна составлять 0,7-0,9 см.

По швам настрачивания кулисы должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 0,6-0,8 см от края.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом основной и отделочной тканей.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.

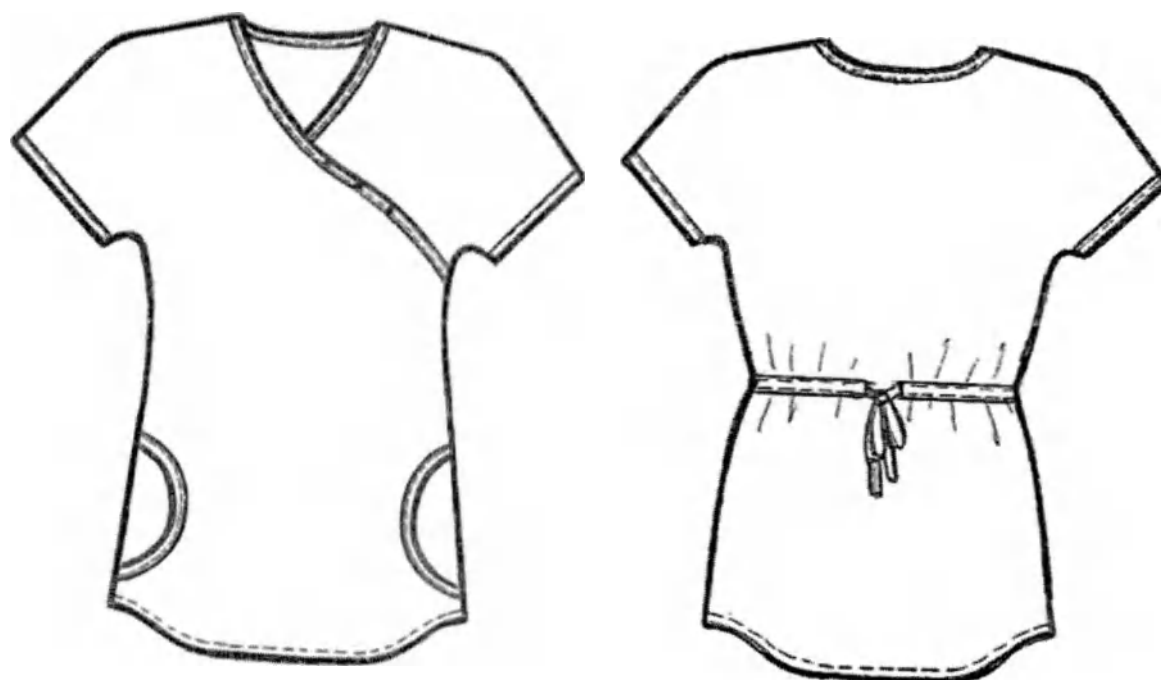


Рисунок В98—Блуза медицинская женская модель 365Б

Таблица В98.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 365Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Перед	1	0
2	Спинка	1	0
3	Верхняя левая часть переда	1	0
4	Бочок переда	2	1
5	Кулиска спинки	2	1
	Отделочная ткань		
6	Завязка	2	1
7	Окантовочная бейка	1	0
	Итого:	10	3

Таблица В 98.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 365Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	70,2	70,4	70,6	70,8	71,1	71,4	71,6	71,8	(+/-1)
2	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	70,3	70,8	71,4	72,0	72,6	73,2	73,7	74,3	(+/-1)
3	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	45,5	47,4	49,3	51,2	53,0	54,9	56,8	58,7	(+/-1)
4	Ширина изделия внизу, см	164-170	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	61,8	63,7	(+/-1)
5	Длина рукава от высшей точки плечевого шва, см	164-170	27,7	28,2	28,9	29,3	29,9	30,5	31,0	31,5	(+/-1)
6	Ширина рукава внизу, см	164-170	18,2	18,8	19,3	19,8	20,3	20,9	21,5	22,1	(+/-0,5)
7	Длина входа в карман, см	164-170	16,3	16,3	16,3	16,5	17,3	17,3	17,3	17,5	(+/-0,5)

Продолжение Таблицы В98.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	72,0	72,2	72,4	72,6	72,8	73,0	73,2	73,4	(+/-1)
2	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	74,8	75,3	75,8	76,4	77,0	77,6	78,2	78,8	(+/-1)
3	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	60,6	62,5	64,4	66,3	68,2	70,0	71,9	73,8	(+/-1)
4	Ширина изделия внизу, см	164-170	65,6	67,5	69,4	71,3	73,2	75,1	77,0	78,9	(+/-1)
5	Длина рукава от высшей точки плечевого шва, см	164-170	32,0	32,5	33,0	33,5	34,0	34,5	35,0	35,5	(+/-1)
6	Ширина рукава внизу, см	164-170	22,7	23,3	23,9	24,6	25,2	25,8	26,4	27,0	(+/-0,5)
7	Длина входа в карман, см	164-170	17,5	17,5	17,5	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	(+/-0,5)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 342 из 529

В99. Блуза медицинская женская модель 366Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская, прямого силуэта, умеренного объёма, длиной ниже линии бёдер, перед короче спинки на 5 см. Изделие без плечевых швов, с расширенным овальным вырезом горловины, уходящим в проймы. Спинка заходит на перед, края выреза должны быть обработаны широкими обтачками. В боковых швах должны быть обработаны высокие разрезы.

Перед с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов и двумя нижними накладными карманами фигурной формы. Верхние края карманов должны быть обработаны широкими обтачками.

Спинка со средним швом и косыми плечевыми вытачками, выходящими из горловины.

Рукава втачные, одношовные, длиной 3/4, с фигурным низом (спереди рукав короче, чем сзади, с плавным переходом длины). Низ рукавов должен быть обработан широкими обтачками.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 3,7 - 3,9 см от края.

По горловине переда, верхним краям карманов и низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 3,5 -3,7 см от края.

По краям разрезов и швам настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1 - 0,2 см от края или шва.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70;

Рост:164-170.

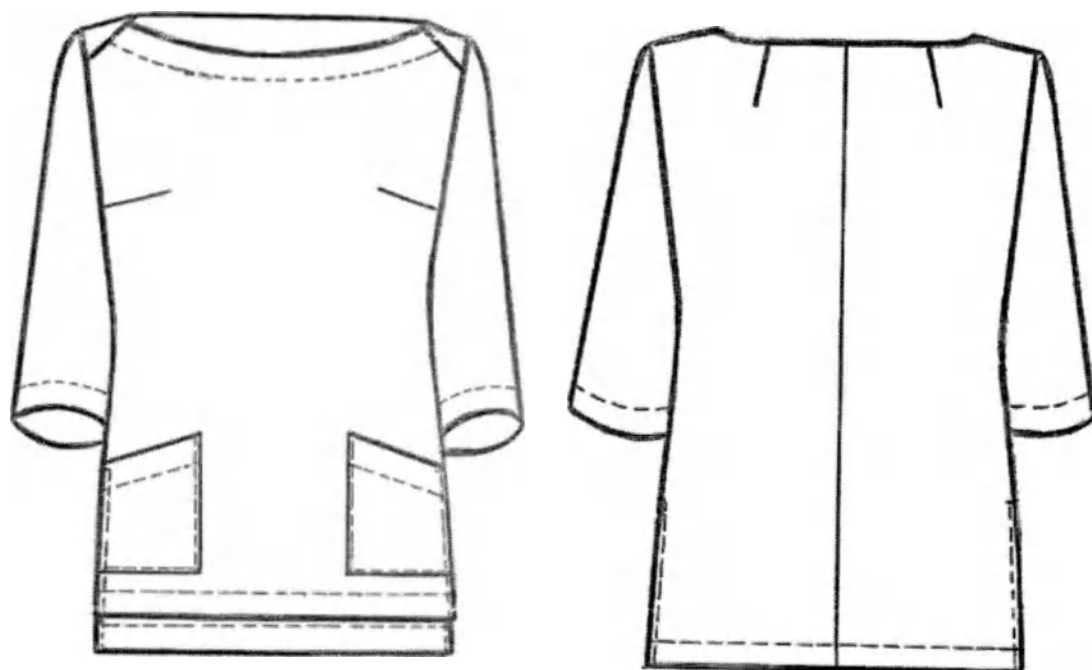


Рисунок В99–Блуза медицинская женская модель 366Б

Таблица В99.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 366Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Перед	1	0
2	Спинка	2	1
3	Рукав	2	1
4	Карман	2	1
5	Обтачка горловины переда	1	0
6	Обтачка горловины спинки	1	0
7	Обтачка низа рукав	2	1
8	Обтачка кармана	2	1
Прокладочный материал			
9	Обтачка горловины переда	1	0
10	Обтачка горловины спинки	1	0
11	Обтачка низа рукава	2	1
12	Обтачка кармана	2	1
Итого:		19	7

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 344 из 529

Таблица В99.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 366Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	70.7	70.8	70.9	71.0	71.4	71.8	71.9	72.0	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	35.3	36.0	36.8	37.5	38.2	38.8	39.5	40.2	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	64.0	64.5	65.0	65.5	66.0	66.5	67.0	67.5	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	46.7	48.5	50.3	52.0	53.8	55.5	57.3	59.1	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	50.0	51.9	53.7	55.5	57.2	59.0	60.8	62.7	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	43.8	44.0	44.1	44.2	44.2	44.3	44.4	44.5	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	15.0	15.7	16.4	17.1	17.8	18.5	19.2	19.9	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	(+/-0.5)
9	Ширина кармана по линии входа, см	164-170	15.0	15.0	15.0	15.0	16.0	16.0	16.0	17.0	(+/-0.3)
10	Глубина кармана по переднему краю, см	164-170	17.4	17.4	17.4	17.4	17.5	17.5	17.7	18.0	(+/-0.3)

Продолжение Таблицы В99.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	72.2	72.8	73.2	73.5	73.8	74.0	74.2	74.4	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	40.9	41.6	42.3	43.0	43.7	44.4	45.1	45.8	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	68.0	68.5	69.0	69.5	70.0	70.5	71.0	71.5	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	72.0	74.0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	64.6	66.5	68.5	70.5	72.5	74.5	76.5	78.5	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	44.6	44.8	45.0	45.2	45.3	45.5	45.7	45.9	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	20.6	21.3	22.0	22.7	23.4	24.1	24.8	25.5	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	(+/-0.5)
9	Ширина кармана по линии входа, см	164-170	17.0	17.0	17.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.5	(+/-0.3)
10	Глубина кармана по переднему краю, см	164-170	18.0	18.1	18.1	18.3	18.3	18.5	18.5	18.7	(+/-0.3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 345 из 529

В100. Блуза медицинская женская модель 367Б.

Описание модели

Блуза женская прямого силуэта, свободного покроя, с удлинённым плечевым срезом, длиной ниже линии бёдер. Перед короче спинки на 6-8 см (в зависимости от размера) с плавным переходом длины. Низ изделия обработан обтачкой. Изделие без воротника. Расширенная горловина овальной формы обработана обтачкой.

Перед цельный. На расстоянии 10-12 см от бокового шва в шов обтачивания низа переда может быть вшита шлевка из декоративной тесьмы шириной 1,5 см и длиной 5,5-6,0 см, расположенная вертикально и настроенная свободным концом на перед.

Спинка со средним швом.

По горловине переда и спинки должна быть проложена строчка на расстоянии 3,0 см от края.

По низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 3,0 см от подогнутого края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 3,0 см от края.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.

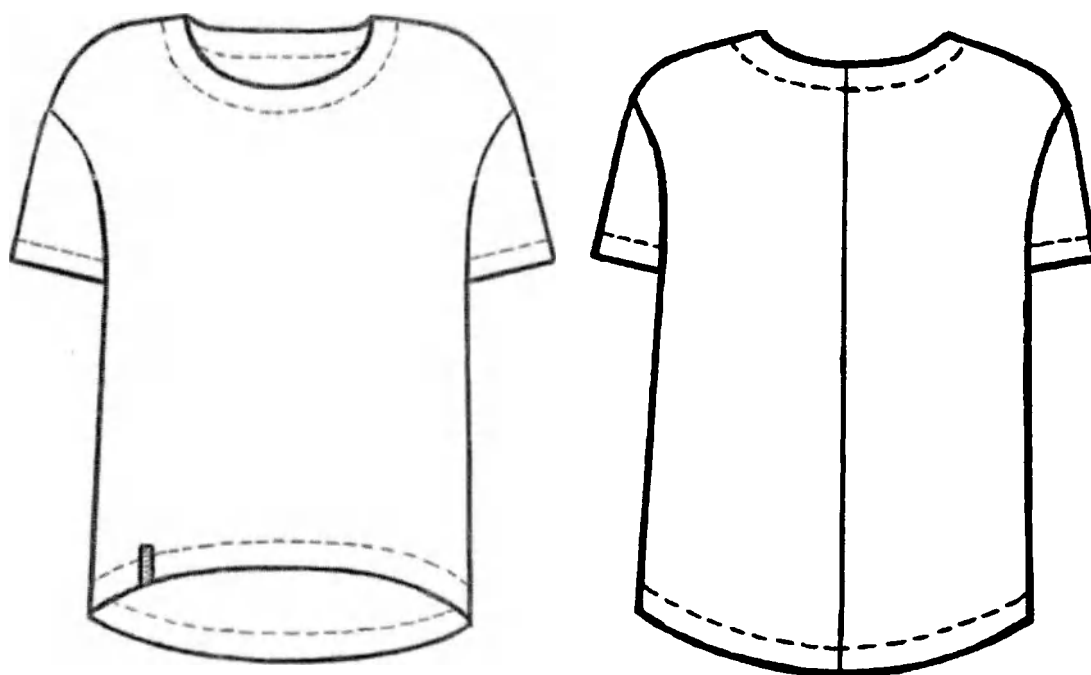


Рисунок В100–Блуза медицинская женская модель 367Б

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 346 из 529

Таблица В100.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 367Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Перед	1	0
2	Спинка	2	1
3	Рукав	2	1
4	Обтачка горловины переда	1	0
5	Обтачка горловины спинки	1	0
6	Обтачка низа переда	1	0
7	Обтачка низа спинки	1	0
	Прокладочный материал		
8	Обтачка горловины переда	1	0
9	Обтачка горловины спинки	1	0
10	Обтачка низа переда	1	0
11	Обтачка низа спинки	1	0
	Итого:	13	2

Таблица В100.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 367Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	67.0	67.2	67.5	67.7	68.1	68.5	68.8	68.0	(+/-1.5)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	49.0	50.5	52.0	53.5	55.0	56.5	58.0	59.5	(+/-1)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	66.5	67.2	68.4	68.8	69.6	70.3	71.0	71.6	(+/-1.5)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	51.5	53.4	55.3	57.2	59.1	61.0	62.9	64.8	(+/-1.5)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	51.5	53.5	55.4	57.3	59.1	61.0	62.8	64.7	(+/-1.5)
6	Длина рукава, см	164-170	12.0	12.2	12.4	12.5	12.7	12.8	12.9	13.1	(+/-0.5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	18.8	19.5	20.2	20.9	21.6	22.3	23.0	23.8	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	17.1	17.8	18.4	19.0	19.6	20.3	20.9	21.5	(+/-0.5)

Продолжение Таблицы В100.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	69.2	69.5	69.8	70.0	70.2	70.5	70.8	71.0	(+/-1.5)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	61.0	62.5	64.0	65.5	67.0	68.5	70.0	71.5	(+/-1)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	72.3	73.0	73.7	74.4	75.1	75.8	76.5	77.2	(+/-1.5)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	66.7	68.6	70.5	72.4	74.3	76.2	78.1	80.0	(+/-1.5)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	66.6	68.5	70.4	72.3	74.2	76.1	78.0	79.9	(+/-1.5)
6	Длина рукава, см	164-170	13.3	13.5	13.7	13.9	14.1	14.3	14.5	14.7	(+/-0.5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	24.5	25.2	26.0	26.7	27.3	28.0	28.7	29.5	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	22.1	22.7	23.3	23.9	24.6	25.3	25.9	26.5	(+/-0.5)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 348 из 529

В101. Блуза медицинская женская модель 368Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская комбинированная из гладкокрашенных тканей двух цветов, длиной ниже линии бёдер, полуприлегающего силуэта; без воротника, с V-образным вырезом горловины, обработанным окантовочной бейкой; с разрезами в боковых швах.

Перед с узкими отрезными бочками. Центральная часть переда разрезная выше линии талии. В шов соединения верхний и нижней частей должна быть вшита кулиса с продетой в неё эластичной тесьмой. Верхняя часть переда с косым подрезом, выходящим из угла горловины, имитирующим запах правой части на левую. Подрез должен быть окантован бейкой вкруговую вместе с горловиной переда и спинки. На подрезе должны быть установлены 3 закрепки: первая на расстоянии 6-7см от угла горловины и ещё 2 с расстоянием 5 см. На нижней части переда должны быть обработаны прямоугольные накладные карманы, задние срезы которых должны входить в швы притачивания бочков, а нижние - в подгибку низа изделия.

Спинка со средним швом, с двумя косыми вытачками, выходящими из горловины, с кулисой, настроенной выше линии талии и с продетой в неё эластичной тесьмой.

Рукава втачные, одношовные, короткие (длиной выше локтя). По центру левого рукава над подгибкой может быть настроен металлический логотип с фирменной символикой.

Блузы могут быть выполнены в двух вариантах: комбинированные и однотонные.

В комбинированных блузах центральная часть переда, рукава и карманы должны быть выполнены из основной ткани №1, бочки переда, спинка и окантовочная бейка – из основной ткани №2.

В однотонных блузах из ткани №2 выполнена только окантовочная бейка, все остальные детали выполнены из основной ткани №1.

Окантовочная бейка должна быть выкроена под углом 45°, ширина ее в готовом виде должна составлять 0,7-0,8 см.

По швам притачивания бочков, краям разрезов, швам настрочивания кулисы и карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По верхним краям карманов, низу рукавов и низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом основных тканей №1 и №2.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.

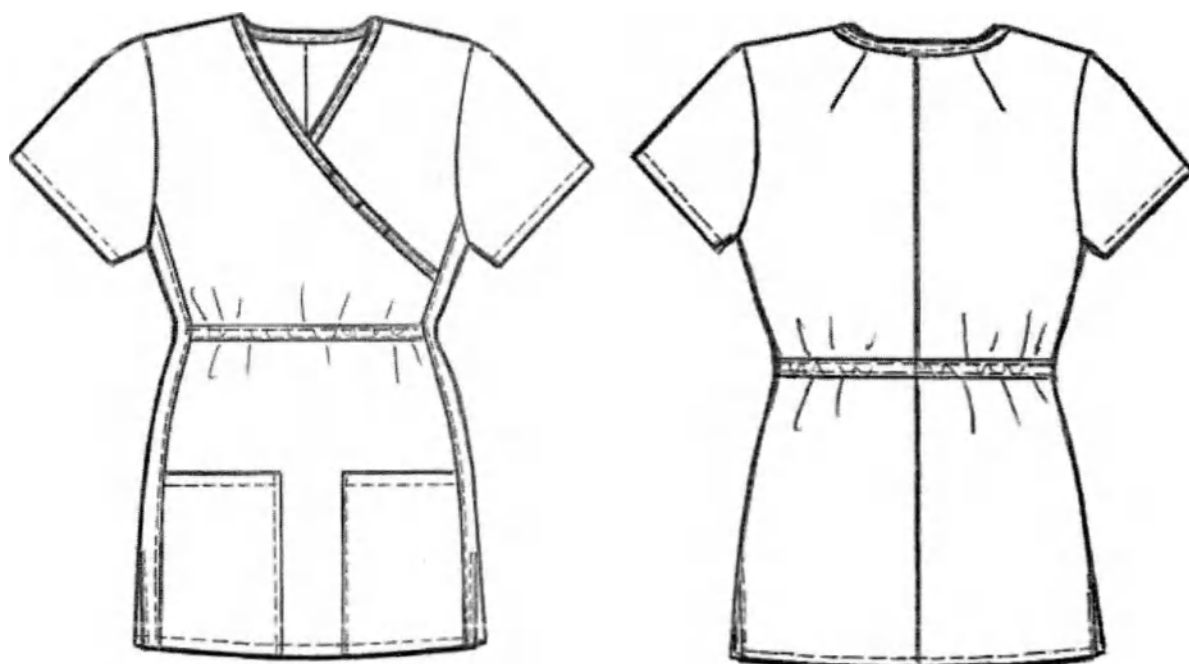


Рисунок В101–Блуза медицинская женская модель 368Б

Таблица В101.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 368Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Верхняя правая часть переда	1	0
2	Верхняя левая часть переда	1	0
3	Нижняя часть переда	1	0
4	Рукав	2	1
5	Карман	2	1
6	Кулилка	2	1
	Отделочная ткань		
7	Бочок переда	2	1
8	Спинка	2	1
9	Окантовочная бейка	1	0
	Итого:	14	5

Таблица В101.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 368Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	67.4	67.5	67.6	67.7	68.1	68.5	68.7	68.9	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	34.6	35.6	36.6	37.5	38.4	39.3	40.1	40.9	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	70.8	71.5	72.0	72.5	73.2	74.4	75.0	75.8	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	45.0	47.0	49.0	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	21.9	22.0	22.1	22.2	22.3	22.6	22.9	23.0	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	16.8	17.4	18.2	19.1	19.7	20.3	21.0	21.6	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	16.0	16.7	17.4	18.1	18.8	19.5	20.1	20.7	(+/-0.5)
9	Ширина кармана по линии входа, см	164-170	15.8	16.3	16.8	17.3	17.8	18.4	19.0	19.6	(+/-0.3)
10	Глубина кармана по переднему краю, см	164-170	20.7	20.7	20.8	20.8	20.8	21.0	21.2	21.2	(+/-0.3)

Продолжение Таблицы В101.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	69.0	69.5	70.0	70.5	71.0	71.5	71.8	72.3	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	41.6	42.3	43.1	43.9	44.6	45.2	45.9	46.6	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	76.6	77.6	78.6	79.6	80.6	81.7	82.6	84.0	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	61.0	63.0	65.0	67.2	69.4	71.6	73.8	76.0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	66.0	68.0	70.0	72.2	74.4	76.6	78.8	81.0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	23.2	23.4	23.6	23.8	24.1	24.3	24.6	25.0	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	22.2	22.9	23.6	24.4	25.3	26.2	27.2	28.2	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	21.3	21.9	22.5	23.1	23.7	24.3	24.9	25.5	(+/-0.5)
9	Ширина кармана по линии входа, см	164-170	20.2	20.7	21.2	21.7	22.2	22.7	23.2	23.7	(+/-0.3)
10	Глубина кармана по переднему краю, см	164-170	21.3	21.3	21.5	21.5	21.5	21.8	21.8	21.8	(+/-0.3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 351 из 529

В102. Блуза медицинская женская модель 369Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская полуприлегающего силуэта, длиной ниже линии бёдер, с закруглёнными разрезами в боковых швах, в углах которых должны быть закрепки, установленные на спецмашине. Спинка длиннее переда на 5,0 см. Изделие без воротника, с круглым вырезом горловины, обработанным обтачкой.

Перед с горизонтальной вставкой из отделочной ткани выше линии груди. С левой стороны на шве притачивания верхней части переда на расстоянии 8-9 см от проймы должны быть 2 закрепки, установленные на спецмашине, с расстоянием между ними 0,7-0,8 см. Ниже линии талии горизонтальный подрез, в котором должны быть обработаны 2 кармана. По линиям входа в карманы на нижней части переда должны быть установлены на спецмашине ограничительные закрепки. Видимые детали мешковин должны быть выполнены из отделочной ткани.

Спинка с центральной застёжкой на потайную тесьму - "молнию" в среднем шве.

Рукава втачные, одношовные, короткие (длиной выше локтя), с притачными отложными манжетами шириной 3,2-3,4 см. По центру манжета левого рукава может быть закреплён металлический логотип с фирменной символикой.

По горловине, швам притачивания отделочной вставки, подрезу и низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

В качестве фурнитуры должна использоваться потайная тесьма-«молния» в тональном сочетании с цветом основной ткани.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом основной и отделочной тканей.

Для изготовления закрепок должны использоваться нитки следующих цветов:
-на шве притачивания верхней части переда одна закрепка основного цвета и одна отделочного;

-на разрезах закрепки отделочного цвета;

-на карманах центральные закрепки отделочного цвета, боковые-основного.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.

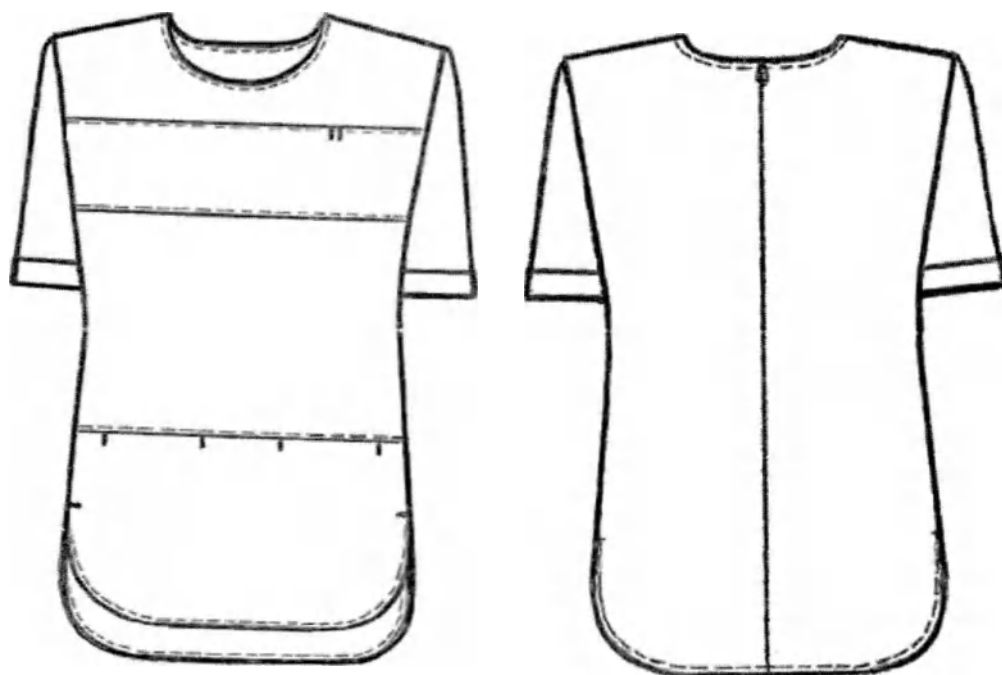


Рисунок В102–Блуза медицинская женская модель 369Б

Таблица В102.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 369Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Верхняя часть переда	1	0
2	Нижняя часть переда	1	0
3	Спинка	2	1
4	Рукав	2	1
5	Отворот рукава	2	1
6	Обтачка горловины переда	1	0
7	Обтачка горловины спинки	2	1
8	Мешковина кармана	2	1
	Отделочная ткань		
9	Средняя часть переда	1	0
10	Мешковина кармана	2	1
	Итого:	16	6

Таблица В102.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 369Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	65,7	65,9	66,1	66,2	66,3	66,4	66,8	67,1	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	35,0	35,8	36,7	37,4	38,1	38,8	39,5	40,3	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	62,8	63,2	63,8	64,3	64,8	65,3	65,8	66,4	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	19,8	20,0	20,2	20,4	20,6	20,9	21,2	21,5	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	16,5	17,2	17,8	18,6	19,3	20,0	20,7	21,4	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	15,9	16,4	17,0	17,6	18,2	18,9	19,5	20,2	(+/-0,5)
9	Ширина кармана по линии входа, см	164-170	13,3	13,3	13,3	13,3	14,3	14,3	14,3	14,3	(+/-0,5)
10	Глубина кармана, см	164-170	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	(+/-0,3)

Продолжение Таблицы В102.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	67,4	67,7	68,0	68,2	68,5	68,8	69,0	69,2	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	41,1	41,9	42,7	43,5	44,3	45,1	45,9	46,7	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	67,0	67,6	68,2	68,8	69,4	70,0	70,6	71,2	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5	72,5	74,5	76,5	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	21,8	22,0	22,2	22,4	22,6	22,8	23,0	23,2	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	22,0	22,7	23,4	24,2	25,1	26,0	27,0	28,0	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	20,9	21,6	22,4	23,2	24,1	24,9	25,9	26,9	(+/-0,5)
9	Ширина кармана по линии входа, см	164-170	15,3	15,3	15,3	15,3	16,3	16,3	16,3	16,3	(+/-0,5)
10	Глубина кармана, см	164-170	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	(+/-0,3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 354 из 529

В103. Блуза медицинская женская модель 370Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бёдер, полуприлегающего силуэта, с расширенной горловиной.

Перед с двумя рельефными швами, выходящими из горловины и расходящимися к низу; со смещённой застёжкой на тесьму - «молнию» в левом рельефном шве, закрытой цельновыкроенной планкой шириной 2,0-2,2 см; с одним верхним прямоугольным накладным карманом, входящим передним срезом в левый рельеф; с двумя нижними накладными карманами, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы, а нижний - в подгибку низа изделия. На подгибку верхнего кармана может быть закреплён металлический логотип с фирменной символикой.

Спинка с двумя рельефными швами, выходящими из горловины и расходящимися к низу.

Рукава втачные, двухшовные, со средними и нижними швами. В средних швах должны быть обработаны шлицы.

Воротник - стойка, застёгивающийся спереди на 1 кнопку, шириной 3,0 см.

По рельефам, средним швам рукавов, краям бортов, воротника, шву втачивания воротника в горловину и швам настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По правому рельефу переда и вдоль застёжки должна быть проложена строчка на расстоянии 2,0 - 2,2 см от края или шва.

По верхним краям карманов и низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,7 - 2,9 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3 - 1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должна использоваться разъёмная тесьма - «молния» в тональном сочетании с цветной тканью и металлическая кнопка диаметром 1,0 - 1,2 см.

Нитки должны использоваться в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.

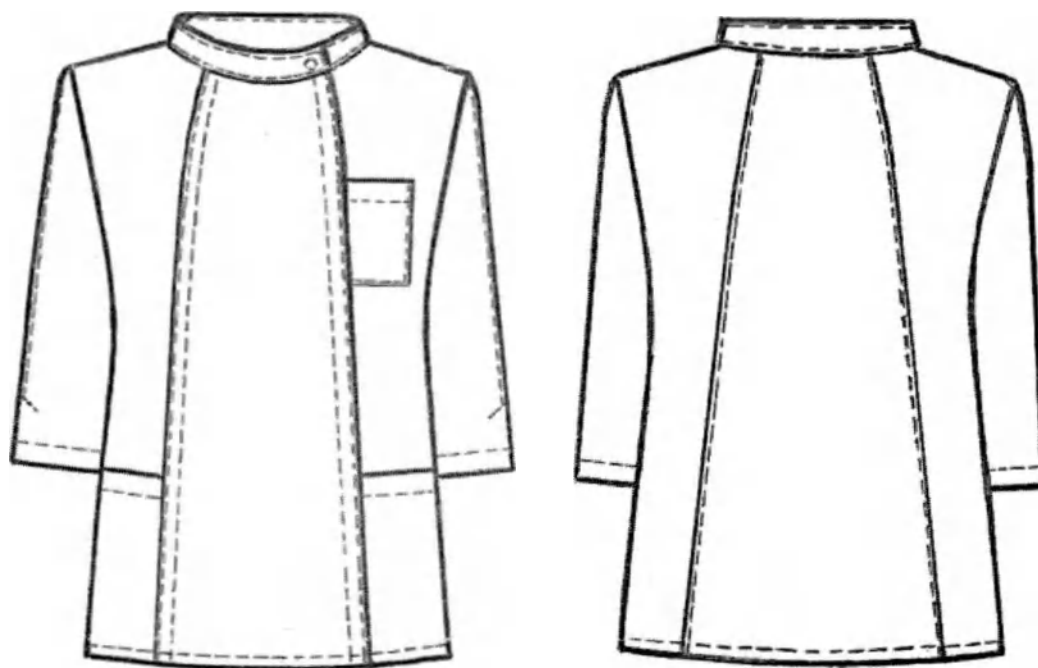


Рисунок В103–Блуза медицинская женская модель 370Б

Таблица В103.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 370Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Перед	1	0
2	Правый бочок переда	1	0
3	Левый бочок переда	1	0
4	Спинка	1	0
5	Бочок спинки	2	1
6	Передняя часть рукава	2	1
7	Задняя часть рукава	2	1
8	Верхний карман	1	0
9	Нижний карман	2	1
10	Левый подборт	1	0
11	Обтачка полочки	1	0
12	Задняя часть воротника	2	1
13	Правая передняя часть воротника	2	1
14	Левая передняя часть воротника	2	1
	Прокладочный материал		
15	Задняя часть воротника	1	0
16	Правая передняя часть воротника	1	0
17	Левая передняя часть воротника	1	0
	Итого:	24	7

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Таблица В103.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 370Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	69.7	70.1	70.7	71.2	71.5	71.7	72.0	72.2	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	34.8	35.8	36.8	37.8	38.4	39.0	39.7	40.4	(+/-1,)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	71.5	72.2	73.0	73.7	74.4	74.9	75.6	76.2	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0	60.0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	52.0	54.0	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0	66.0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	45.2	45.4	45.6	45.8	46.0	46.2	46.4	46.6	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	17.0	17.7	18.4	19.1	19.8	20.6	21.4	22.2	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	13.2	13.6	14.0	14.6	15.0	15.5	16.0	16.5	(+/-0,5)
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	164-170	9,6	10,3	10,3	10,3	10,5	10,5	10,5	10,6	(+/-0,3)
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	164-170	12,8	12,9	13,0	13,1	13,2	13,2	13,3	13,3	(+/-0,3)
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	14,6	15,5	16,3	17,0	17,7	18,5	19,2	20,0	(+/-0,3)
12	Глубина нижнего кармана, см	164-170	21,2	21,3	21,4	21,5	21,6	21,7	21,7	21,8	(+/-0,3)
13	Длина воротника по отлету, см	164-170	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	(+/-1)

Продолжение Таблицы В103.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	72,6	73,0	73,3	73,5	73,7	73,9	74,1	74,3	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	41,1	41,8	42,5	43,2	43,9	44,6	45,3	46,0	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	76,8	77,4	78,0	78,6	79,2	79,8	80,4	81,0	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	46,8	47,0	47,2	47,4	47,6	47,8	48,0	48,2	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	23,0	23,7	24,4	25,1	25,8	26,5	27,3	28,0	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	17,0	17,6	18,1	18,6	19,1	19,6	20,1	20,6	(+/-0,5)
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	164-170	10,6	10,8	11,2	11,2	11,2	11,5	11,5	11,5	(+/-0,3)
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	164-170	13,4	13,5	13,6	13,6	13,7	13,8	13,9	14,0	(+/-0,3)
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	21,0	22,0	22,9	23,8	24,7	25,6	26,5	27,4	(+/-0,3)
12	Глубина нижнего кармана, см	164-170	21,8	21,9	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1	22,2	(+/-0,3)
13	Длина воротника по отлету, см	164-170	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	(+/-1)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 357 из 529

В104. Блуза медицинская женская модель 371Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская удлиненная, прямого силуэта, умеренного объема; с отрезной кокеткой: на спине выше уровня лопаток, а на переде шириной 5,0см. Спинка длиннее переда на 4,5см, в боковых швах закругленные разрезы.

Перед с центральной бортовой застёжкой на 7-8 кнопок, с притачными планками под застёжку шириной 3,0-3,2см; с косым рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокетки и заканчивающимися в швах притачивания планок ниже линии талии; с двумя накладными карманами, расположенными наклонно. Передние края карманов должны входить в рельефные швы, задние края - в боковые швы. Верхние края должны быть обработаны обтачками. В рельефные швы вместе с карманами должны быть втачаны прямоугольные клапана с кнопками, углы клапанов должны быть прикреплены к карманам закрепками, выполненными на спецмашине.

Спинка со средним швом.

Рукава втачные, одношовные, длиной 3/4. Низ рукавов должен быть оформлен притачными отложными манжетами шириной 4,7-4,9см и декоративными патами шириной 3,0-3,2см, вшитыми одним концом в швы притачивания манжет посередине рукавов, а другим концом прикрепляющимися к рукавам с помощью кнопок.

Воротник стояче-отложной, на отрезной стойке, застёгивающиеся на 1 кнопку.

По краям бортов, пат, стойки, низу изделия и швам притачивания планок застёжки должна быть положена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

По кокетке, рельефами, верхним краям карманов, краям воротника и клапанов должна быть положена двойная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8см от края или шва.

От верха до низа на каждом кармане перпендикулярно линии входа должны быть проложены 2 параллельных строчки с расстоянием 0,6-0,7см ограничивающие размеры кармана.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,0-1,2см.

Нитки для изготовления изделия должны использоваться в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 358 из 529

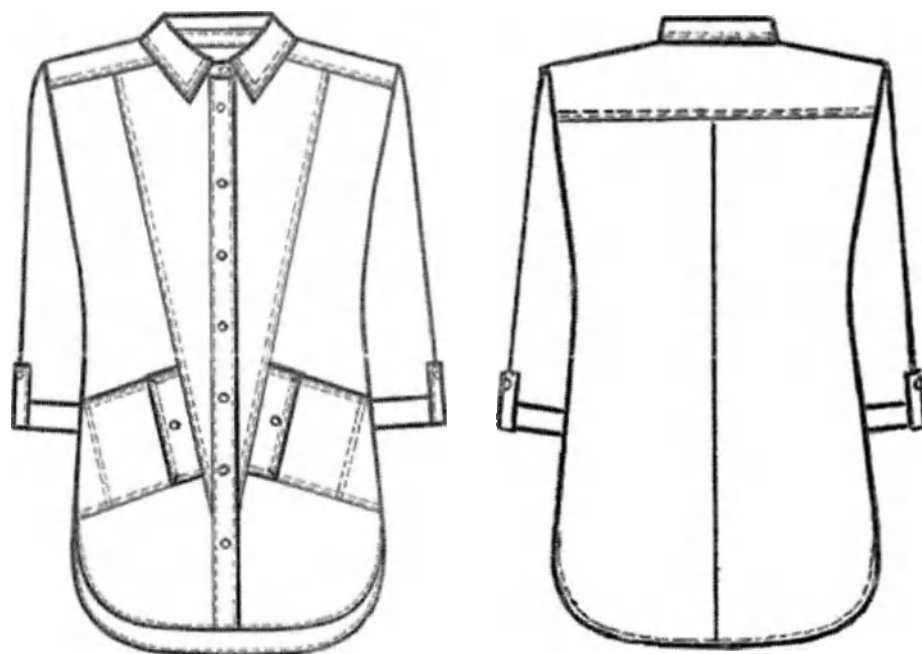


Рисунок В104–Блуза медицинская женская модель 371Б

Таблица В104.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 371Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	2	1
4	Кокетка	1	0
5	Рукав	2	1
6	Отворот рукава	2	1
7	Планка застежки	2	1
8	Карман накладной	2	1
9	Клапан	2	1
10	Обтачка кармана	2	1
11	Пата рукава	2	1
12	Воротник	2	1
13	Стойка воротника	2	1
	ИТОГО	25	12

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 359 из 529

Таблица В104.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 371Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	76,4	77,0	77,5	78,2	78,6	79,0	79,2	79,4	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	35,6	36,8	37,8	38,8	40,0	41,0	41,8	42,7	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	74,8	75,5	76,4	77,5	78,5	79,5	80,3	81,0	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	43,6	43,8	44,0	44,3	44,6	44,9	45,2	45,4	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	16,3	17,0	17,6	18,2	18,8	19,4	20,0	20,7	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	(+/-0,5)
9	Ширина кармана по линии входа, см	164-170	15,0	16,0	16,4	16,7	16,7	17,4	17,4	18,3	(+/-0,3)
10	Глубина кармана по переднему краю, см	164-170	15,8	15,8	15,8	16,3	16,3	16,3	16,3	16,7	(+/-0,3)
11	Длина воротника по отлету, см	164-170	46,2	46,8	47,3	48,1	49,1	50,4	51,6	52,3	(+/-0,5)

Продолжение Таблицы В104.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	79,6	79,8	80,0	80,4	80,8	81,3	81,5	81,7	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	43,5	44,2	44,9	45,5	46,1	46,8	47,4	48,2	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	81,8	82,6	83,4	84,4	85,6	86,5	87,3	88,0	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	65,5	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5	77,5	79,5	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	45,6	45,8	46,0	46,4	46,7	47,0	47,2	47,4	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	21,4	22,2	22,9	23,6	24,5	25,2	26,0	26,7	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	17,0	17,6	18,2	18,8	19,4	20,0	20,6	21,2	(+/-0,5)
9	Ширина кармана по линии входа, см	164-170	18,3	18,3	18,3	18,3	19,0	19,0	19,0	19,0	(+/-0,3)
10	Глубина кармана по переднему краю, см	164-170	16,7	16,7	17,4	17,4	17,8	17,8	18,0	18,0	(+/-0,3)
11	Длина воротника по отлету, см	164-170	53,3	54,4	55,2	56,0	57,1	58,3	59,3	60,4	(+/-0,5)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 360 из 529

B105. Блуза медицинская женская модель 372Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская полуприлегающего силуэта, длиной ниже линии бёдер; перед короче спинки на 3,0 см, с плавным переходом длины; без воротника, с круглым вырезом горловины, обработанным обтачкой.

Перед с горизонтальными нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов; со смещённой бортовой застёжкой на 6 кнопок, идущей под углом от середины верха изделия вниз со смещением влево. Край борта правой полочки и её горловина должны быть обработаны притачными планками шириной 3,8-4,0 см. Вверху край борта правой полочки выше левого на 2,0 см. На левой полочке должен быть обработан верхний, а на правой- нижний накладные карманы фигурной формы. На подгибку верхнего кармана может быть закреплён металлический логотип с фирменной символикой.

Спинка со средним швом и двумя вертикальными талиевыми вытачками, начинающимися на уровне лопаток и заканчивающимися на уровне талии мягкими складками, над которыми должны быть вшиты 2 завязки шириной 1 см.

Рукава втачные, одношовные, длиной 3/4.

Низ рукавов должен быть оформлен притачными манжетами шириной 3,8-4,0 см.

Планки правой полочки и манжеты должны быть выполнены из отделочной ткани с принтом.

По краям горловины, бортов, завязок, швам притачивания планок и манжет, а также швам настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 0,7-0,9 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,0-1,2 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 164-170.

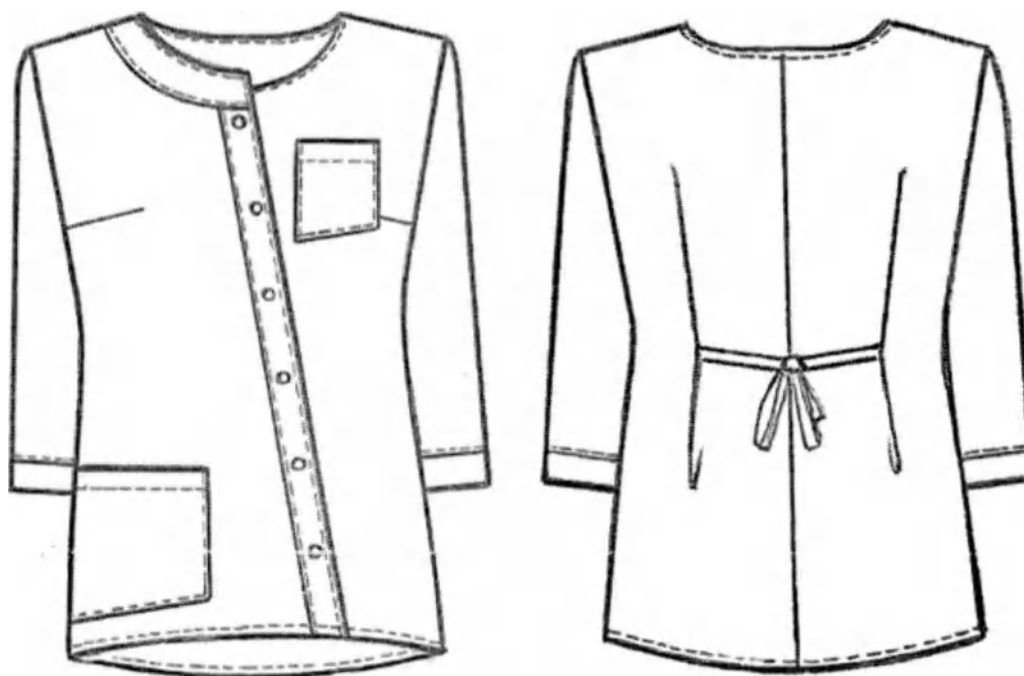


Рисунок В105—Блуза медицинская женская модель 372Б

Таблица В105.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 372Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Правая полочка	1	0
2	Левая полочка	1	0
3	Спинка	2	1
4	Рукав	2	1
5	Верхний карман	1	0
6	Нижний карман	1	0
7	Завязка	2	1
8	Подборт правой полочки	1	0
9	Подборт левой полочки	1	0
10	Обтачка горловины спинки	1	0
	Отделочная ткань		
11	Планка правой полочки	1	0
12	Планка горловины правой полочки	1	0
13	Манжета	2	1
	Итого:	17	4

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-
2023, ред.2

Страница 362 из 529

Таблица В105.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 372Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	69.2	69.4	69.6	70.0	70.4	70.8	71.2	71.5	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	35.4	36.2	37.0	37.8	38.6	39.4	40.4	41.2	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	69.0	69.6	70.3	71.0	71.5	72.0	72.5	73.0	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	44.3	44.5	44.7	44.9	45.1	45.3	45.4	45.5	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	16.6	17.2	17.8	18.4	19.0	19.7	20.4	21.1	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	14.6	14.9	15.2	15.6	15.9	16.2	16.6	16.9	(+/-0.5)
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	164-170	9.7	10.2	10.2	10.2	10.7	10.7	10.7	11.3	(+/-0.3)
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	164-170	11.0	12.1	12.1	12.1	12.2	12.2	12.2	12.7	(+/-0.3)
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	16.2	16.7	16.7	16.7	17.7	17.7	17.7	18.8	(+/-0.3)
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	164-170	19.6	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	19.8	20.0	(+/-0.3)

Продолжение Таблицы В105.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	71.8	72.5	73.0	73.4	73.8	74.0	74.3	74.6	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	42.0	42.6	43.2	43.8	44.6	45.4	46.2	47.0	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	73.8	74.5	75.1	75.7	76.3	77.0	77.7	78.4	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	72.0	74.0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	66.0	68.0	70.0	72.0	74.0	76.0	78.0	80.0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	45.8	46.0	46.2	46.4	46.6	46.7	45.9	46.1	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	21.8	22.5	23.2	23.9	24.6	25.3	26.0	26.7	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	17.3	17.7	18.1	18.5	18.9	19.3	19.7	20.1	(+/-0.5)
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	164-170	11.3	11.3	11.6	11.6	11.6	12.0	12.0	12.0	(+/-0.3)
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	164-170	12.7	12.7	13.0	13.0	13.0	13.2	13.2	13.2	(+/-0.3)
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	18.8	18.8	19.5	19.5	19.5	20.5	20.5	20.5	(+/-0.3)
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	164-170	20.0	20.0	20.2	20.2	20.2	20.3	20.3	20.3	(+/-0.3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 363 из 529

В106. Блуза медицинская женская модель 373Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская из белой ткани прямого силуэта, умеренного объема, длиной ниже линии бедер. Спинка длиннее переда, с плавным переходом длины.

Перед разрезной, состоит из левой и правой частей, заходящих друг на друга, образуя складку шириной 5,3-5,5 см. Вырез горловины фигурный: сверху круглый, переходящий в V-образный. В круглую часть выреза горловины переда входят 2 косые нагрудные вытачки. Низ переда асимметричный-правая часть длиннее левой и образует выступ 4,5-4,7 см.

Спинка со средним швом.

Рукава втачные, одношовные, короткие. Низ рукавов должен быть обработан притачными манжетами шириной 1,2-1,4 см. По центру манжета левого рукава может быть закреплен металлический логотип с фирменной символикой (по желанию заказчика).

Воротник-стойка шириной 1,6-1,8 см.


В месте перехода выреза горловины в складку должна быть проложена горизонтальная строчка длиной 5,3-5,5 см.

По швам притачивания манжет и по низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки белого цвета.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

Рост: 164-170.

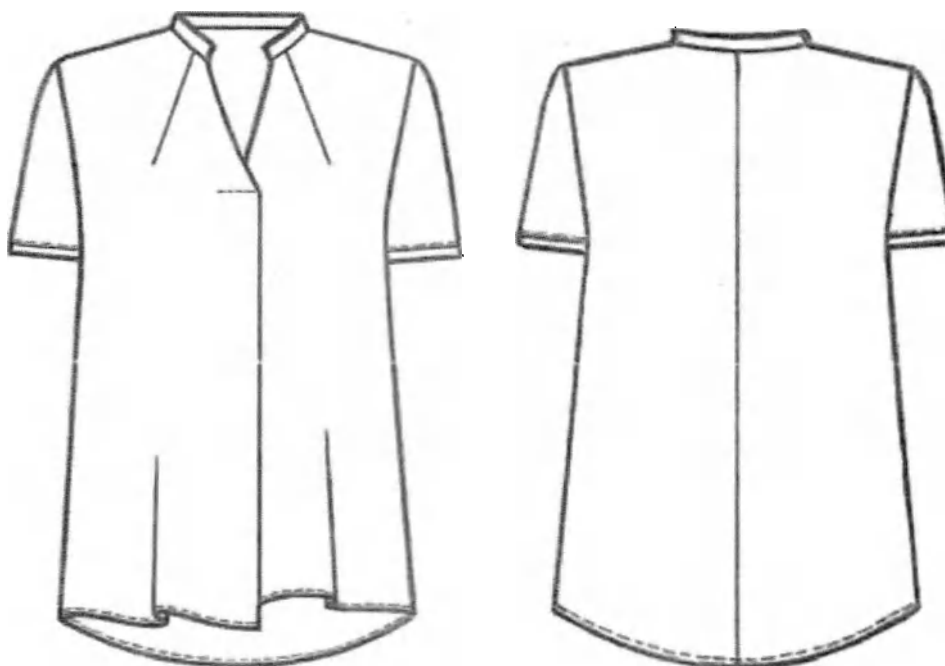

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 364 из 529

Рисунок В106–Блуза медицинская женская модель 373Б

Таблица В106.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 373Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Правая полочка	1	0
2	Левая полочка	1	0
3	Спинка	2	1
4	Рукав	2	1
5	Манжета	2	1
6	Воротник	2	1
7	Подборт правой полочки	1	0
8	Подборт левой полочки	1	0
9	Обтачка горловины спинки	1	0
	Прокладочный материал (клеевая)		
15	Манжета	2	1
	Воротник	1	0
16	Обтачка горловины спинки	1	0
17	Подборта	2	1
	ИТОГО	19	6

**Таблица В106.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 373Б**

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	69,9	70,3	70,7	71,1	71,5	71,8	72,1	72,5	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	35,1	35,9	36,8	37,7	38,6	39,5	40,3	41,1	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	69,5	69,8	70,1	70,4	70,8	71,1	71,5	71,9	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	21,0	21,2	21,4	21,6	21,8	22,1	22,4	22,7	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	16,7	17,4	18,1	18,9	19,6	20,4	21,1	21,8	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	16,0	16,7	17,4	18,1	18,8	19,6	20,2	20,8	(+/-0,5)
9	Длина воротника по отлету, см	164-170	35,4	36,3	37,2	38,1	39,0	39,8	40,7	41,6	(+/-0,3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 365 из 529

В107. Блуза медицинская женская модель 374Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская из белой или гладкокрашеной эластичной ткани длиной ниже линии бедер, полуприлегающего силуэта, с овальным вырезом горловины, обработанным обтачкой; с разрезами в боковых шах.

Перед отрезной по линии талии; с косым подрезом, выходящим из правого плечевого шва и доходящим до низа; с горизонтальной вставкой шириной 3,8-4,0 см, выходящей из правого бокового шва и заканчивающейся в косом подрезе; с двумя рельефными швами, выходящими из проймы. Правый рельеф заканчивается в шве притачивания горизонтальной вставки, левый в горизонтальном шве на линии талии. На нижней правой части переда должен быть обработан накладной карман фигурной формы, с застроченным по переднему краю дополнительным отделением шириной 3,8-4,0 см. На косом подрезе выше линии груди и на горизонтальном подрезе на расстоянии 1,0 см от левого рельефного шва должны быть установлены на спецмашине по 2 декоративных закрепки. На верхнем углу кармана должна быть установлена на спецмашине одна вертикальная закрепка, разделяющая основной и дополнительный входы в карман.

Спинка с двумя рельефными швами, выходящими из пройм и доходящими до низа, и средним швом, в котором обработана застежка на потайную молнию.

Рукава втачные, одношовные, короткие.

По горловине, рельефам, подрезам, входу в карман, краям разрезов и швам настрачивания кармана должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,8-3,0 см от края. По низу правого рукава по центру может быть закреплен металлический логотип с фирменной символикой (по желанию заказчика).

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должна использоваться потайная тесьма-молния длиной 50-60 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани. Для выполнения декоративных закрепок должны использоваться нитки контрастного цвета.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

Рост: 164-170.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 366 из 529

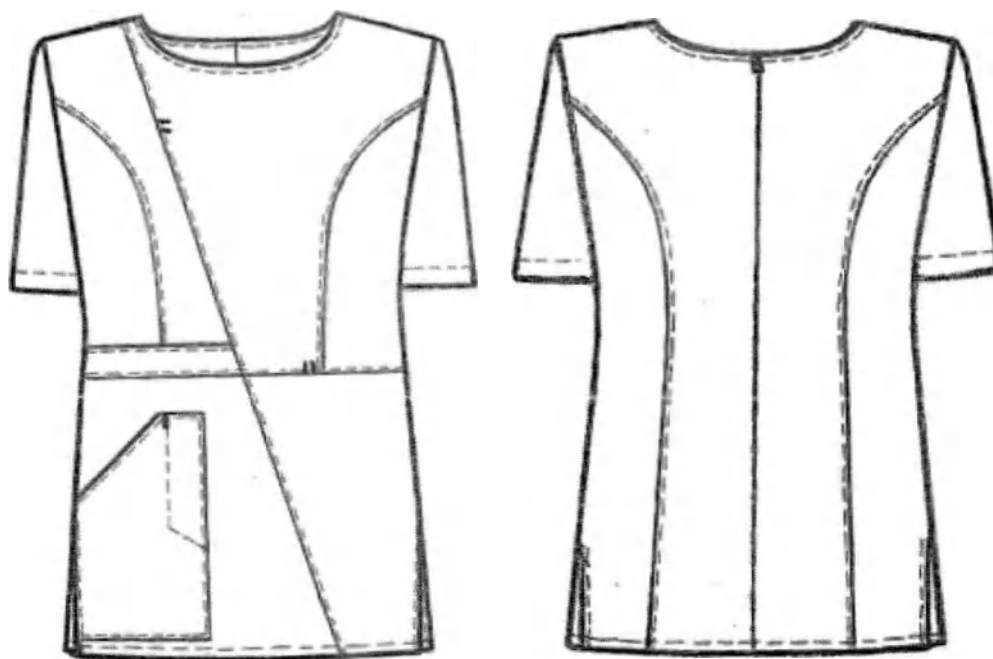


Рисунок В107–Блуза медицинская женская модель 374Б

Таблица В107.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 374Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Верхняя центральная часть переда	1	0
2	Верхняя правая часть переда	1	0
3	Правый бочок переда	1	0
4	Левый бочок переда	1	0
5	Вставка переда	1	0
6	Нижняя правая часть переда	1	0
7	Нижняя левая часть переда	1	0
8	Спинка	2	1
9	Бочок спинки	2	1
10	Рукав	2	1
11	Карман	1	0
12	Обтачка кармана	1	0
13	Обтачка горловины переда	1	0
14	Обтачка горловины спинки	2	1
Прокладочный материал (клеевая)			
15	Обтачка горловины переда	1	0
16	Обтачка горловины спинки	2	1
17	Обтачка кармана	1	0
ИТОГО		22	5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA¹ по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 367 из 529

Таблица В107.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 374Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер						Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	67.5	67.9	68.2	68.3	68.4	68.5	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	33.7	34.6	35.5	36.4	37.3	38.2	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	70.1	70.7	71.3	71.7	72.2	72.7	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	45.0	47.0	49.0	51.0	53.0	55.0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	51.3	53.2	55.1	57.0	58.9	60.8	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	21.3	21.5	21.7	21.8	22.2	22.7	(+/-0.5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	15.8	16.5	17.2	17.8	18.5	19.3	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	14.9	15.5	16.3	16.9	17.5	18.0	(+/-0.5)
9	Ширина кармана посередине, см	164-170	18.0	18.6	19.3	20.0	20.5	20.9	(+/-0.3)
10	Глубина кармана по переднему краю, см	164-170	22.5	22.5	23.0	23.2	23.2	23.2	(+/-0.3)

Продолжение Таблицы В107.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер						Допуск, см
			52	54	56	58	60	62	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	68.7	68.9	69.4	69.9	70.4	70.9	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	38.9	39.8	40.4	41.1	41.8	42.4	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	73.3	73.9	74.9	75.9	76.8	77.7	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	57.0	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	62.7	64.6	66.5	68.4	70.3	72.2	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	23.1	23.5	23.9	24.1	24.3	24.6	(+/-0.5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	20.2	21.2	22.2	23.0	23.9	24.6	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	18.9	19.8	21.0	21.9	22.8	23.4	(+/-0.5)
9	Ширина кармана посередине, см	164-170	21.3	21.7	22.2	22.6	22.9	23.4	(+/-0.3)
10	Глубина кармана по переднему краю, см	164-170	23.4	23.4	23.6	23.6	23.6	23.6	(+/-0.3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 368 из 529

В108. Блуза медицинская женская модель 375Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская комбинированная из отделочной ткани, прилегающего силуэта, длиной ниже линии бедер; без воротника, с расширенным V-образным вырезом горловины, обработанным косой бейкой шириной 1,5-1,6 см в готовом виде.

Перед с неширокими отрезными кокетками, отрезными бочками, горизонтальными нагрудными вытачками, выходящими из швов притачивания бочков; с двумя нижними накладными карманами с наклонными входами. Задние срезы карманов должны входить в боковые швы, а нижние-в подгибку низа изделия.

Спинка со средним швом и двумя рельефными швами, выходящими из пройм и доходящими до низа изделия.

Рукава втачные, одношовные, короткие (выше локтя).

Кокетки, передние и задние бочки, а также рукава изделия должны выполнены из отделочной ткани контрастного цвета.

По шву притачивания окантовочной бейки и швам настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от шва.

По верхним краям карманов должна быть положена строчка на расстоянии 2,9-3,1 см от края.

По низу изделия и низу рукавов должна быть проложена строчка на двухигольной плоскошовной машине на расстоянии 1,2-1,3 см от подогнутого края.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани и трикотажного полотна.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;

Рост: 164-170.

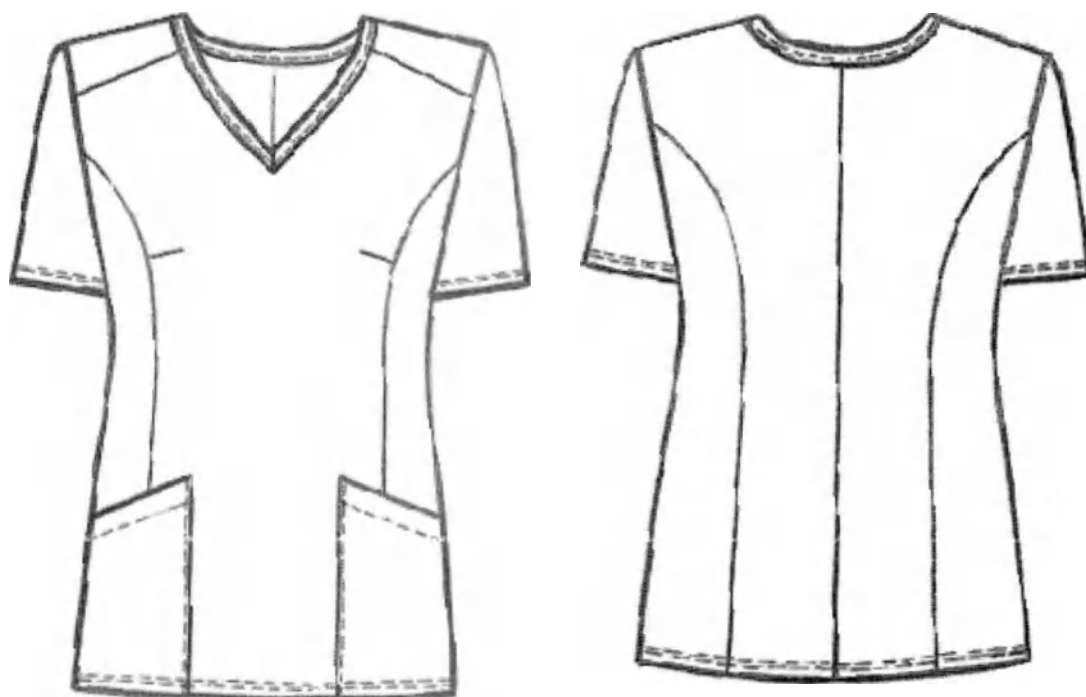


Рисунок В108–Блуза медицинская женская модель 375Б

Таблица В108.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 375Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Перед	1	0
2	Спинка	2	1
3	Карман	2	1
4	Окантовочная бейка	1	0
Трикотажное полотно			
5	Бочок переда	2	1
6	Бочок спинки	2	1
7	Рукав	2	1
8	Кокетка переда	2	1
	ИТОГО	14	6

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA* по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 370 из 529

**Таблица В108.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 375Б**

№	Наименование измерения	Рост	Размер						Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	63.4	63.6	63.8	64.0	64.2	64.5	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	35.0	35.6	36.2	36.9	37.5	38.2	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	66.5	67.0	67.5	68.0	68.5	69.0	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	43.7	45.5	47.3	49.1	51.0	53.2	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	49.0	50.8	52.6	54.4	56.2	58.2	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	21.4	21.6	21.8	22.0	22.1	22.2	(+/-0.5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	15.8	16.5	17.2	17.9	18.6	19.3	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	15.4	16.0	16.6	17.3	18.0	18.6	(+/-0.5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	14.5	15.1	15.8	16.6	17.4	18.2	(+/-0.3)
10	Глубина кармана по переднему краю, см	164-170	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.7	(+/-0.3)

Продолжение Таблицы В108.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер					Допуск, см
			52	54	56	58	60	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	64.8	65.0	65.2	65.4	65.6	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	39.1	40.0	40.9	41.8	42.6	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	69.5	70.1	70.8	71.5	72.1	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	55.3	57.5	59.8	62.2	64.5	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	60.4	62.6	64.8	67.1	69.4	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	22.4	22.7	23.0	23.4	23.9	(+/-0.5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	20.0	20.7	21.4	22.2	23.0	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	19.3	20.0	20.7	21.4	22.2	(+/-0.5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	19.0	19.8	20.4	21.0	21.5	(+/-0.3)
10	Глубина кармана по переднему краю, см	164-170	20.7	20.8	20.8	20.8	20.8	(+/-0.3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 371 из 529

В109. Блуза медицинская женская модель 376Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская из белой или гладкокрашеной ткани, длиной ниже линии бедер, прямого силуэта, умеренного объема; без воротника, с овальным вырезом горловины, обработанным обтачкой; с разрезами в боковых швах. В углах разрезов должны быть установленные на спецмашине закрепки.

Перед с притачной кокеткой на уровне линии груди. На кокетке должен быть обработан косой подрез, выходящий из горловины и заканчивающийся в шве притачивания кокетки, имитируя запах правой части кокетки на левую. На левой части кокетки сверху треугольный вырез. Края подреза и треугольного выреза должны быть окантованы бейкой. Концы бейки, выходящие в горловину должны быть зафиксированы установленными на спецмашине закрепками. На нижней части переда 2 накладных кармана, задние срезы которых входят в боковые швы. В передних углах карманов должны быть установленные на спецмашине закрепки. На правом кармане должен быть обработан дополнительный карман, края которого входят в подгибку основного кармана и в боковой шов. Верхний край дополнительного кармана скошен, спереди к нему притачана треугольная вставка. Верхние края левого кармана, дополнительного правого кармана и треугольной вставки должны быть окантованы бейкой.

Окантовочная бейка должна быть выкроена под углом 45° из отделочной ткани контрастного цвета. Ширина её в готовом виде должна составлять 0,7-0,8 см.

Спинка со средним швом.

Рукава втачные, одношовные, короткие.

По горловине, кокетке, разрезам, швам притачивания бейки и настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По верхнему краю правого кармана должна быть проложена строчка на расстоянии 1,8-2,0 см от края.

По низу рукавов и низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом основной и отделочной тканей.

Для выполнения закрепок должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом отделочной ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

Рост: 164-170.

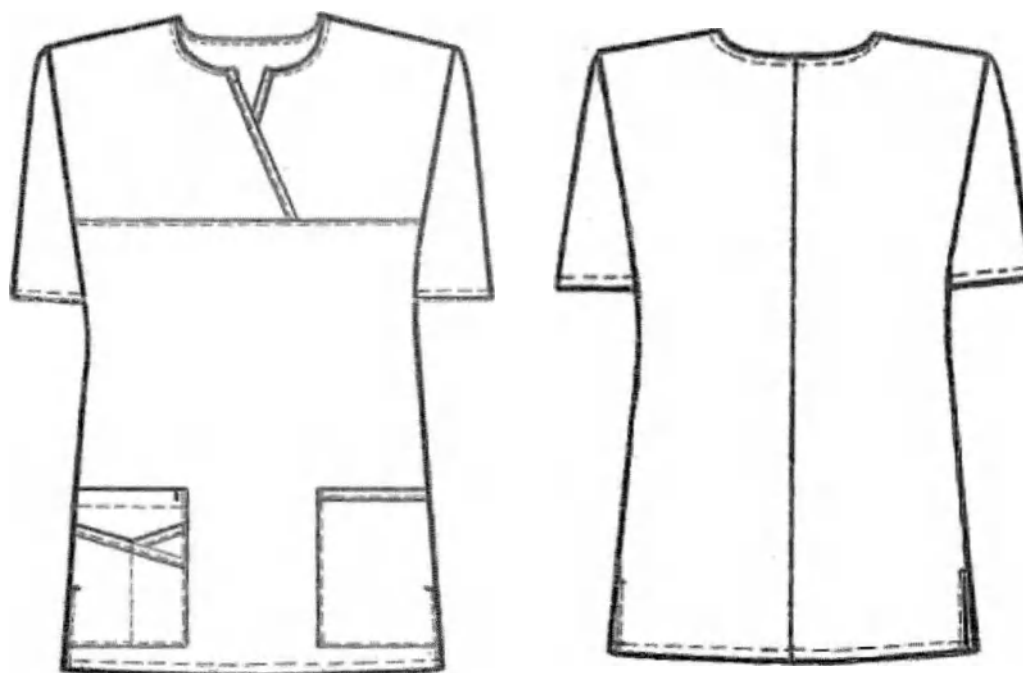


Рисунок В109—Блуза медицинская женская модель 376Б

Таблица В109.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 376Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Перед	1	0
2	Правая часть кокетки переда	1	0
3	Левая часть кокетки переда	1	0
4	Спинка	2	1
5	Рукав	2	1
6	Правый карман	1	0
7	Дополнительный правый карман	1	0
8	Вставка дополнительного кармана	1	0
9	Левый карман	1	0
10	Обтачка горловины переда	2	1
11	Обтачка горловины спинки	1	0
	Отделочная ткань		
12	Окантовочная бейка	1	0
	ИТОГО	15	3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 373 из 529

Таблица В109.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 376Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер						Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	68,4	68,5	68,7	68,8	69,2	69,5	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	35,0	35,9	36,8	37,7	38,6	39,5	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	71,5	72,0	72,5	73,0	73,6	74,3	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	23,6	23,7	23,8	23,9	24,0	24,3	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	16,7	17,4	18,1	18,9	19,6	20,3	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	16,1	16,7	17,3	17,9	18,5	19,1	(+/-0,5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	16,0	16,7	17,8	18,0	18,5	19,0	(+/-0,3)
10	Глубина нижнего кармана, см	164-170	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	(+/-0,3)

Продолжение Таблицы В109.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер						Допуск, см
			52	54	56	58	60	62	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	69,7	69,9	70,2	70,7	71,3	71,7	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	40,3	41,1	41,8	42,5	43,3	44,1	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	75,0	75,7	76,4	77,2	78,3	79,3	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	58,0	60,0	62,0	64,0	66,1	68,3	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,2	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	24,6	24,8	24,9	25,1	25,3	25,5	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	21,0	21,7	22,3	23,0	23,7	24,5	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	19,7	20,3	21,0	21,7	22,5	23,3	(+/-0,5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	19,5	19,7	20,1	20,5	20,8	21,2	(+/-0,3)
10	Глубина нижнего кармана, см	164-170	19,1	19,2	18,4	19,5	19,6	19,7	(+/-0,3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В110. Блуза медицинская женская модель 378Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская из белой или гладкокрашеной эластичной ткани, длиной ниже линии бедер, полуприлегающего силуэта, с зауженной линией плеч. Изделие без воротника, с фигурным вырезом горловины, обработанным обтачкой; с разрезами в боковых швах.

Перед со средним швом; отрезной по линии талии. Из шва подреза выходят 2 косые расходящиеся нагрудные вытачки. На нижней части переда должны быть обработаны 2 накладных кармана с наклонными входами, задние срезы которых входят в боковые швы, а нижние в подгибку низа изделия.

Спинка со средним швом, с двумя рельефными швами, выходящими из пройм и доходящими до низа.

Рукава втачные, одношовные, короткие, с двумя мягкими складками по окату, заложенными на каждом рукаве.

По горловине, среднему шву и подрезу переда, рельефам, краям разрезов и швам настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По верхним краям карманов и низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,3-2,5 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

Рост: 164-170.

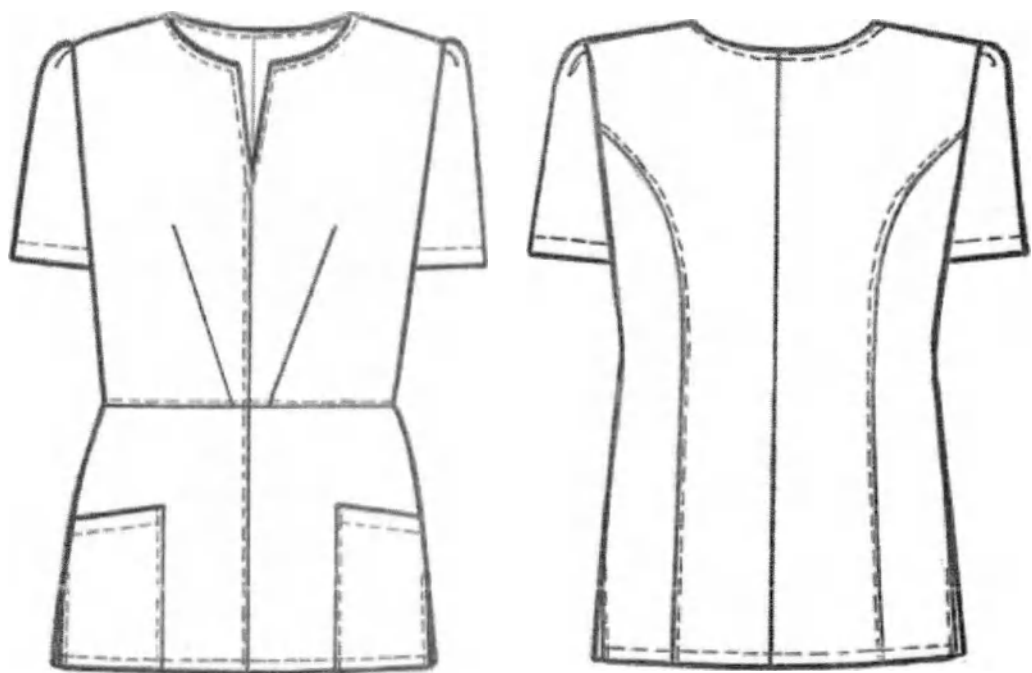


Рисунок В110–Блуза медицинская женская модель 378Б

Таблица В110.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 378Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Верхняя часть полочки	2	1
2	Нижняя часть полочки	2	1
3	Спинка	2	1
4	Бочок спинки	2	1
5	Рукав	2	1
6	Карман	2	1
7	Обтачка горловины переда	2	1
8	Обтачка горловины спинки	1	0
Прокладочный материал (клеевая)			
9	Обтачка горловины переда	2	1
10	Обтачка горловины спинки	1	0
11	Подгибка кармана	2	1
ИТОГО		20	9

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 376 из 529

Таблица В110.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 378Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер						Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	
1	Длина спинки посередине, см	161-170	67,0	67,3	67,5	67,7	67,9	68,1	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	161-170	33,4	34,0	34,7	35,3	35,9	36,5	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	161-170	69,3	70,0	70,7	71,3	72,0	72,7	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	161-170	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	161-170	51,0	53,0	55,0	56,8	58,6	60,4	(+/-1)
6	Длина рукава, см	161-170	19,2	19,5	19,8	20,0	20,3	20,7	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	161-170	16,3	17,0	17,7	18,4	19,1	19,9	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	161-170	15,9	16,6	17,3	18,0	18,7	19,5	(+/-0,5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	161-170	14,6	15,3	16,3	16,7	17,3	17,3	(+/-0,3)
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	161-170	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	(+/-0,3)

Продолжение Таблицы В110.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер						Допуск, см
			52	54	56	58	60	62	
1	Длина спинки посередине, см	161-170	68,3	68,5	68,9	69,4	69,9	70,4	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	161-170	37,2	37,9	38,6	39,3	40,0	40,7	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	161-170	73,4	74,1	74,8	75,8	76,8	77,8	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	161-170	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	161-170	62,3	64,2	66,0	67,8	69,6	71,4	(+/-1)
6	Длина рукава, см	161-170	21,2	21,5	21,8	22,2	22,6	23	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	161-170	20,7	21,5	22,3	23,0	23,7	24,4	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	161-170	20,3	21,1	21,9	22,6	23,3	24,0	(+/-0,5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	161-170	18,2	18,7	19,6	20,4	21,2	22,0	(+/-0,3)
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	161-170	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	(+/-0,3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 377 из 529

В111. Блуза медицинская женская модель 379Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская из белой или гладкокрашеной эластичной ткани; длиной до линии бедер, прямого силуэта, умеренного объема; с V-образным вырезом горловины, обработанным спереди притачными планками шириной 2,4-2,5 см, а на спинке-окантовочной бейкой; с разрезами в боковых швах. Бейка для окантовки горловины должна быть вырезана под углом 45°; ширина ее в готовом виде должна составлять 0,8-0,9 см. На левой стороне горловины, на расстоянии 2,5 см от ее угла должны быть 2 установленные на спецмашине декоративные закрепки: одна на шве втачивания планки в горловину, вторая на расстоянии 0,5-0,6 см.

Перед с неширокими отрезными кокетками, горизонтальными нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов; с двумя боковыми накладными карманами, нижние срезы которых входят в подгибку низа; с одним дополнительным накладным карманом с наклонным входом, настроенным на левый боковой карман. На верхних передних углах основных карманов должно быть установлено на спецмашине по одной горизонтальной закрепке, на заднем углу дополнительного кармана-2 вертикальные закрепки с расстоянием 0,5-0,6 см.

Спинка со средним швом.

Рукава втачные, одношовные, короткие. На правом рукаве по желанию заказчика может быть закреплен металлический логотип с фирменной символикой.

Низ рукавов должен быть оформлен притачными отложными манжетами шириной 2,4-2,6 см.

По швам притачивания кокеток, планок горловины, окантовочной бейки, швам настрачивания карманов и краям разрезов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По верхним краям карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,9-2,1 см от края. По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 2,1-2,3 см от края.

Для изготовления изделия должны применяться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Для выполнения закрепок должны использоваться нитки контрастного цвета.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

Рост: 164-170.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 378 из 529

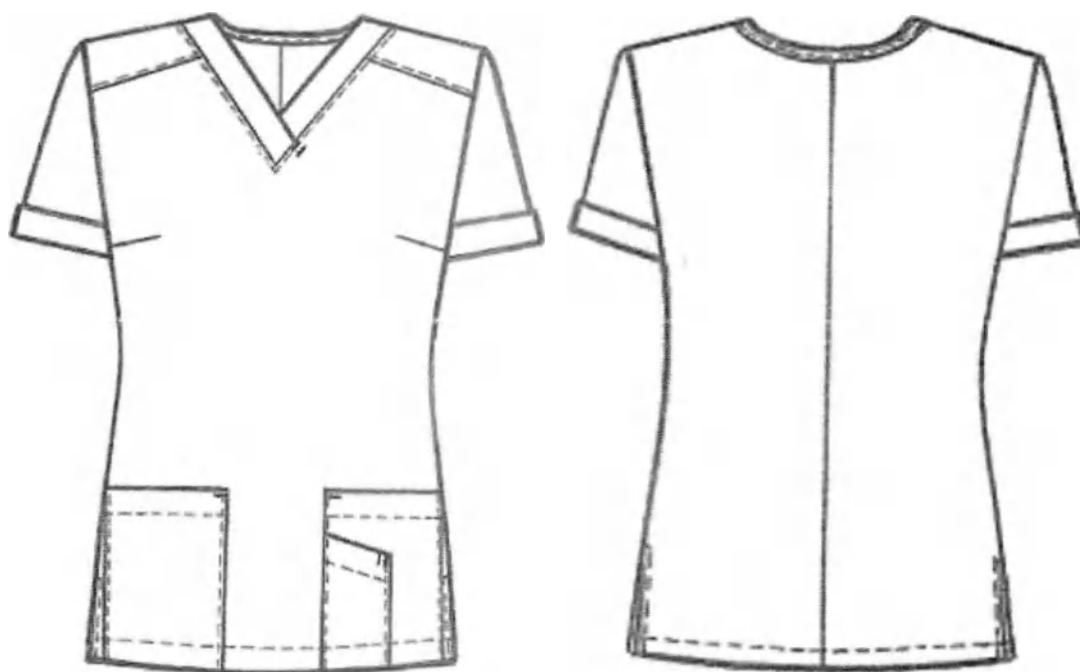


Рисунок В111–Блуза медицинская женская модель 379Б

Таблица В111.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 379Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Перед	1	0
2	Кокетка переда	2	1
3	Спинка	2	1
4	Рукав	2	1
5	Планка горловины	2	1
6	Отворот рукава	2	1
7	Карман	2	1
8	Дополнительный карман	1	0
9	Окантовочная бейка	1	0
Прокладочный материал (клеевая)			
10	Клеевая полоска на горловину	2	1
11	Клеевая на подгибку кармана	2	1
12	Клеевая на подгибку дополнительного кармана	1	0
ИТОГО		20	8

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 379 из 529

**Таблица В111.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 379Б**

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	62.1	62.3	62.5	62.7	62.9	63.2	63.5	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	35.0	35.6	36.2	36.9	37.5	38.2	39.1	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	64.6	65.1	65.7	66.2	67.0	67.6	68.3	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	43.7	45.7	47.7	49.7	51.7	53.7	55.7	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	47.5	49.5	51.5	53.5	55.5	57.5	59.5	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	19.8	20.0	20.1	20.3	20.4	20.5	20.6	(+/-0.5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	15.3	16.0	16.8	17.5	18.2	18.9	19.6	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	14.8	15.4	16.0	16.7	17.4	18.0	18.7	(+/-0.5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	15.0	15.0	16.0	16.3	16.7	17.0	17.4	(+/-0.3)
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	164-170	19.2	19.3	19.3	19.3	19.4	19.5	19.6	(+/-0.3)

Продолжение Таблицы В111.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер						Допуск, см
			54	56	58	60	62	64	
1	Длина спинки посередине, см	164-170	63.7	63.9	64.1	64.3	64.6	65	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	164-170	40.0	40.9	41.8	42.6	43.3	44.2	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	164-170	69.0	69.7	70.7	71.7	72.7	73.7	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	164-170	57.7	59.7	61.7	63.7	65.8	67.9	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	164-170	61.6	63.6	65.7	67.8	69.9	72.0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	164-170	20.9	21.3	21.8	22.1	22.4	22.7	(+/-0.5)
7	Ширина рукава под проймой, см	164-170	20.3	21.0	21.7	22.5	23.3	24.0	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	164-170	19.4	20.1	20.8	21.6	22.3	23.0	(+/-0.5)
9	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	164-170	17.7	18.2	18.5	18.9	19.3	19.7	(+/-0.3)
10	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	164-170	19.6	19.6	19.7	19.7	19.8	19.8	(+/-0.3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 380 из 529

B112. Блуза медицинская женская модель 027Б.

Описание модели

Блуза медицинская женская из белой или гладкокрашеной ткани длиной ниже линии бедер, полуприлегающего силуэта, с разрезами в боковых швах.

Перед с отложными лацканами выше линии груди; с центральной бортовой застежкой на 5 обметанных петель и 5 пуговиц; с рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с двумя верхними накладными карманами, входящими передними срезами в рельефные швы на уровне груди и двумя нижними накладными карманами с наклонными входами, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы. Верхние края карманов должны быть обработаны подгибкой шириной 2,0-2,2 см, застроченной налицевую сторону.

Спинка с вертикальными рельефными швами, выходящими из плечевых швов и доходящими до низа; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне талии и скрепленными посередине спинки с помощью пуговицы.

Рукава втачные, одношовные, длиной выше локтя.

Воротник отложной, «пиджачного типа».

По рельефам, разрезам, краям бортов, полупоясов, воротника и швам настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу рукавов и низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться пластмассовые пуговицы диаметром 1,7-1,9 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

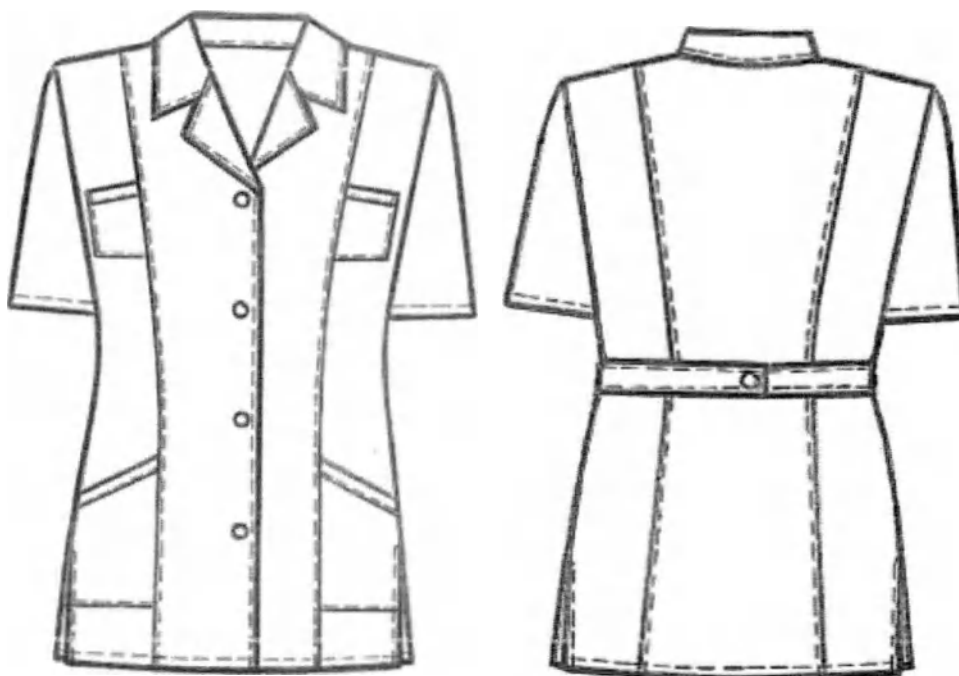


Рисунок В112–Блуза медицинская женская модель 027Б

Таблица В112.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 027Б

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	1	0
4	Бочок спинки	2	1
5	Рукав	2	1
6	Карман верхний	2	1
7	Карман нижний	2	1
8	Воротник	2	1
9	Полупояс	2	1
10	Подборт	2	1
	ИТОГО	19	9

Таблица 112.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 027Б

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	70,0	70,5	71,1	71,5	72,0	72,5	72,8	73,0	(±)1,0
		164-170	74,0	74,5	75,1	75,5	76,0	76,5	76,8	77,0	
		176-182	76,0	76,5	77,1	77,5	78,0	78,5	78,8	79,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,3	36,3	37,3	38,3	39,3	40,3	41,3	42,3	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	72,6	73,2	74,1	75,0	75,9	76,5	77,2	78,0	(±)1,0
		164-170	76,6	77,2	78,1	79,0	79,9	80,5	81,2	82,0	
		176-182	78,6	79,2	80,1	81,0	81,9	82,5	83,2	84,0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,6	46,7	48,8	50,9	53,0	55,1	57,2	59,3	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	51,6	53,7	55,8	57,9	60,0	62,1	64,2	66,3	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	23,4	23,5	23,8	24,3	24,6	24,9	25,4	26,0	(±)0,5
		164-170	25,4	25,5	25,8	26,3	26,6	26,9	27,4	28,0	
		176-182	26,4	26,5	26,8	27,3	27,6	27,9	28,4	29,0	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,2	17,8	18,3	19,0	19,6	20,3	20,8	21,6	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,0	16,5	16,9	17,5	17,9	18,5	19,0	19,5	(±)0,5
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	7,4	7,6	7,7	7,9	8,2	8,3	8,3	8,4	(±)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	10,5	10,6	10,8	11,1	11,3	11,4	11,4	11,5	(±)0,3
11	Ширина нижнего кармана вниз, см	все роста	15,2	16,1	16,9	17,7	18,5	19,2	19,9	20,7	(±)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	19,2	19,4	19,5	19,5	19,6	19,7	19,8	19,9	(±)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	44,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	(±)0,5

Продолжение Таблицы В112.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	73,3	73,8	74,2	74,2	74,3	74,4	74,5	74,8	(±)1,0
		164-170	77,3	77,8	78,2	78,2	78,3	78,4	78,5	78,8	
		176-182	79,3	79,8	80,2	80,2	80,3	80,4	80,5	80,8	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,3	44,1	44,7	45,5	46,2	46,8	47,4	48,1	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	78,8	79,8	80,8	81,8	82,4	83,4	84,4	85,4	(±)1,0
		164-170	82,8	83,8	84,8	85,8	86,4	87,4	88,4	89,4	
		176-182	84,8	85,8	86,8	87,8	88,4	89,4	90,4	91,4	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	61,3	63,4	65,5	67,6	69,7	71,8	73,9	76,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	68,4	70,6	72,8	75,0	77,2	79,4	81,6	83,8	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	26,9	27,2	27,5	27,8	28,2	28,3	28,5	29,1	(±)0,5
		164-170	28,9	29,2	29,5	29,8	30,2	30,3	30,5	31,1	
		176-182	29,9	30,2	30,5	30,8	31,2	31,3	31,5	32,1	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,5	23,3	24,0	24,7	25,5	26,1	26,7	27,4	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	20,2	20,7	21,6	22,3	23,0	23,6	24,0	24,5	(±)0,5
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	8,5	8,7	9,2	9,2	9,3	9,4	9,5	9,9	(±)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	11,6	11,6	11,6	11,8	12,0	12,3	12,3	12,6	(±)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 383 из 529

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
11	Ширина нижнего кармана вниз, см	все роста	21,5	22,3	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,5	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	20,1	20,7	20,2	20,3	20,4	20,5	20,6	20,7	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	52,0	53,0	54,0	55,0	56,2	57,4	58,6	59,6	(+/-)0,5

В113. Блуза медицинская женская модель 03-1.

Описание модели

Блуза медицинская женская удлиненная (длиной до середины бедра); прямого силуэта, умеренного объема; отрезная ниже линии талии на 5см; с разрезами в боковых швах.

Перед с центральной бортовой застёжкой на 6 кнопок; с притачными кокетками; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до шва притачивания нижней части переда; с одним верхним накладным карманом фигурной формы, верхний край которого обработан притачной планкой шириной 2,5-2,7см; с двумя нижними накладными карманами фигурной формы, верхние края которых обработаны притачными планками шириной 2,5-2,7см; с двумя дополнительными нижними карманами, настроенными на основные и входящие в швы их настрачивания: правый дополнительный карман нижним срезом, а левый – передним и нижним срезами.

Спинка с притачной кокеткой и средним швом на верхней части спинки.

Рукава втачные, двухшовные, с нижними и средними швами, длиной ниже локтя.

Воротник стояче – отложной, на отрезной стойке, застегивающейся на одну кнопку.

По переду выше линии груди и по спинке над швом притачивания кокетки, а так же по низу рукавов может быть настроена светоотражающая лента шириной 2,5 см.

На левый верхний карман может быть настроен шеврон «скорая помощь» диаметром 6,7 см; на спинку под кокеткой может быть настроен прямоугольный шеврон «скорая помощь» размером 29,0-10,0 см.

По краям бортов, кокеткам, рельефам, среднему шву спинки, шву соединения верхней и нижней частей переда и спинки, средним швам рукавов, краям воротника и планок карманов, по швам настрачивания основных и дополнительных карманов, швам притачивания планок карманов должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8см от края или шва.

По разрезам, шву притачивания стойки к воротнику и шву втачивания стойки в горловину должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

По низу рукавов и низу изделия должна быть проложена строка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,1-1,3см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани и цветом светоотражающей ленты.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

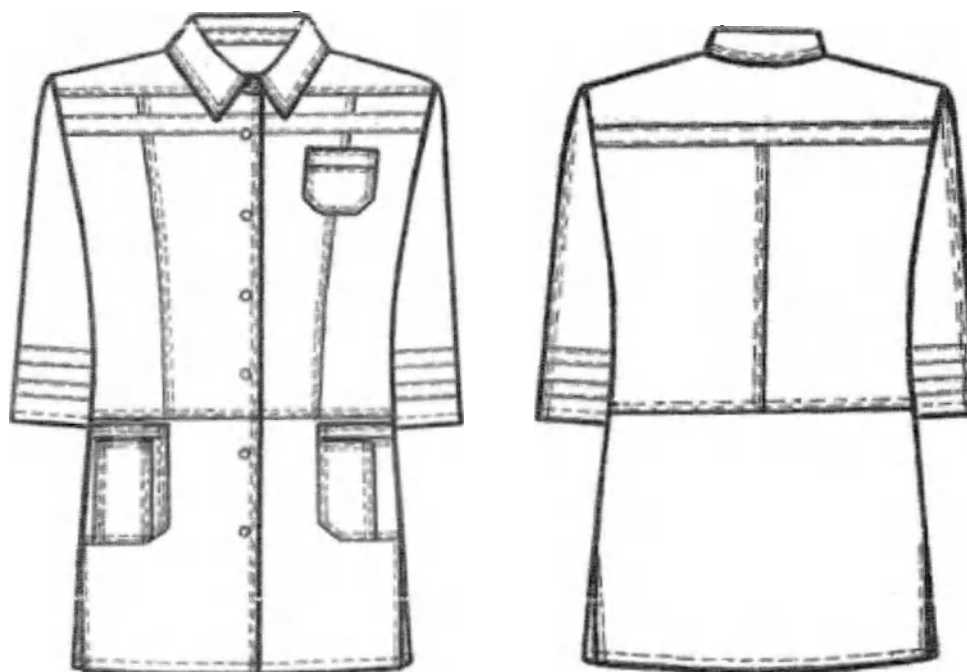


Рисунок В113–Блуза медицинская женская модель 03-1

Таблица В113.1 Спецификация деталей кроя Блуза медицинская женская модель 03-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Верхняя часть полочки	2	1
2	Бочок верхней части полочки	2	1
3	Нижняя часть полочки	2	1
4	Верхняя часть спинки	2	1
5	Нижняя часть спинки	1	0
6	Кокетка полочки	2	1
7	Кокетка спинки	1	0
8	Подборт	2	1
9	Верхний карман	1	0
10	Планка верхнего кармана	1	0

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-
2023, ред.2

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
11	Основной нижний карман	2	1
12	Планка нижнего кармана	2	1
13	Левый нижний карман дополнительный	1	0
14	Правый нижний карман дополнительный	1	0
15	Передняя часть рукава	2	1
16	Задняя часть рукава	2	1
17	Воротник	2	1
18	Стойка воротника	2	1
	ИТОГО	30	12

Таблица В113.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Блуза медицинская женская модель 03-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	75,7	75,8	75,9	76,0	76,2	76,5	76,7	76,7	(±)1,0
		164-170	79,7	79,8	79,9	80,0	80,2	80,5	80,7	80,7	
		176-182	81,7	81,8	81,9	82,0	82,2	82,5	82,7	82,7	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	33,8	34,8	35,7	36,6	37,5	38,4	39,3	40,1	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	76,5	77,5	78,5	80,0	81,2	82,2	83,2	83,9	(±)1,0
		164-170	80,5	81,5	82,5	84,0	85,2	86,2	87,2	87,9	
		176-182	82,5	83,5	84,5	86,0	87,2	88,2	89,2	89,9	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	45,3	47,2	49,1	51,0	52,9	54,8	56,7	58,6	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	38,6	38,8	39,1	39,3	39,9	40,1	40,6	40,8	(±)0,5
		164-170	41,6	41,8	42,1	42,3	42,9	43,1	43,6	43,8	
		176-182	43,1	43,3	43,6	43,8	44,4	44,6	45,1	45,3	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	16,7	17,4	18,0	18,7	19,5	20,3	21,0	21,6	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,0	15,5	16,1	16,6	17,1	17,6	18,0	18,5	(±)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	8,9	8,9	9,3	9,3	9,9	9,9	10,6	10,6	(±)0,3
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	все роста	10,6	10,6	11,2	11,2	11,5	11,5	12,0	12,0	(±)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	16,1	17,0	17,6	18,2	19,0	19,7	20,5	21,0	(±)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	18,0	18,0	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	(±)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0	55,0	(±)0,5

Продолжение Таблицы В113.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	76,8	77,0	77,2	77,7	78,3	78,7	79,1	79,5	(±)1,0
		164-170	80,8	81,0	81,2	81,7	82,3	82,7	83,1	83,5	
		176-182	82,8	83,0	83,2	83,7	84,3	84,7	85,1	85,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	41,0	41,9	42,8	43,6	44,4	45,0	45,6	46,2	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 386 из 529

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	84,5	85,4	86,2	87,0	88,3	89,4	90,5	91,5	(±)1,0
		164-170	88,5	89,4	90,2	91,0	92,3	93,4	94,5	95,5	
		176-182	90,5	91,4	92,2	93,0	94,3	95,4	96,5	97,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	60,5	62,4	64,3	66,2	68,1	70,0	71,9	73,8	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полуканоса застёжки), см	все роста	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	41,2	41,4	41,7	42,0	42,5	43,0	43,3	43,6	(±)0,5
		164-170	44,2	44,4	44,7	45,0	45,5	46,0	46,3	46,6	
		176-182	45,7	45,9	46,2	46,5	47,0	47,5	47,8	48,1	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,2	22,9	23,6	24,3	25,0	25,7	26,4	27,1	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	(±)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	10,6	10,6	10,6	10,6	11,0	11,0	11,5	11,5	(±)0,3
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	все роста	12,0	12,0	12,0	12,0	12,3	12,3	12,5	12,5	(±)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	22,0	20,3	21,2	21,8	21,8	21,8	22,2	22,2	(±)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	18,5	18,7	18,7	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	(±)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	56,0	57,0	58,0	59,0	60,2	61,5	62,5	63,5	(±)0,5

В114. Брюки медицинские женские модель 501.

Описание модели

Брюки медицинские женские прямого силуэта, умеренного объема.

Верхний срез брюк должен быть обработан притачным поясом шириной 3,4-3,6 см.

Пояс брюк должен быть отстрочен по всей длине на 5-игольной спецмашине цепного стежка пятью параллельными строчками с расстоянием между ними 0,6-0,7 см.

По низу брюк должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоцелевого использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 387 из 529

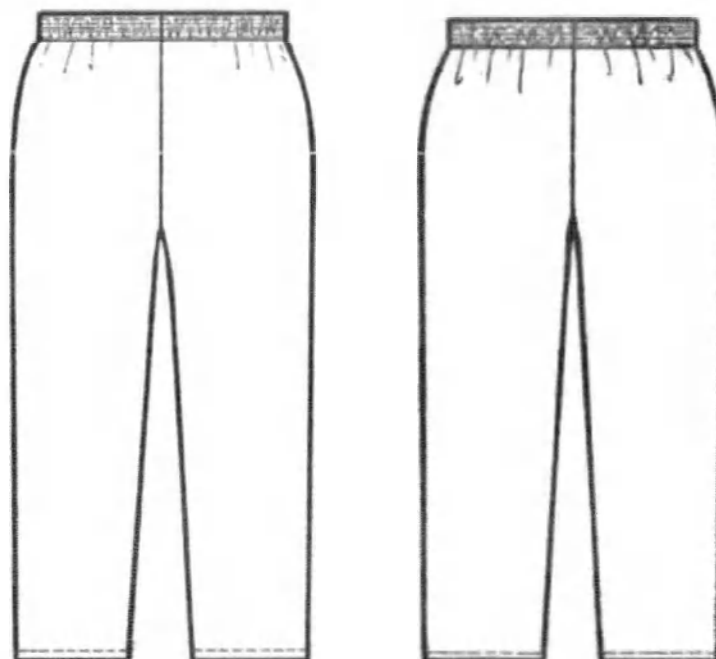


Рисунок В514— Брюки медицинские женские модель 501

Таблица В114.1 Спецификация деталей кроя Брюки медицинские женские модель 501

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Передняя половинка	2	1
2	Задняя половинка	2	1
3	Пояс	2	1
Итого		6	3

Таблица В114.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Брюки медицинские женские модель 501

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	99,0	99,2	99,5	99,7	100,0	100,2	100,5	100,7	(±)1,0
		164-170	105,0	105,2	105,5	105,7	106,0	106,2	106,5	106,7	
		176-182	108,0	108,2	108,5	108,7	109,0	109,2	109,5	109,7	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	76,0	75,5	75,0	74,5	74,0	73,5	72,8	72,1	(±)1,0
		164-170	82,0	81,5	81,0	80,5	80,0	79,5	78,8	78,1	
		176-182	85,0	84,5	84,0	83,5	83,0	82,5	81,8	81,1	
3	Ширина на уровне талии, см	все роста	41,5	43,5	45,7	48,0	50,1	52,2	54,5	57,1	(±)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	29,5	30,6	31,8	33,0	34,2	35,4	36,5	37,6	(±)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	18,6	19,0	19,4	19,8	20,2	20,6	21,0	21,4	(±)0,5

Продолжение Таблицы В114.2

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 388 из 529

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	101,0	101,2	101,4	101,6	101,8	102,0	102,2	102,4	(+/-)1,0
		164-170	107,0	107,2	107,4	107,6	107,8	108,0	108,2	108,4	
		176-182	110,0	110,2	110,4	110,6	110,8	111,0	111,2	111,4	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	71,4	70,7	70,0	69,3	68,6	68,0	67,5	67,0	(+/-)1,0
		164-170	77,4	76,7	76,0	75,3	74,6	74,0	73,5	73,0	
		176-182	80,4	79,7	79,0	78,3	77,6	77,0	76,5	76,0	
3	Ширина на уровне талии, см	все роста	59,4	61,6	63,8	66,0	68,2	70,3	72,4	74,5	(+/-)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	38,7	39,8	41,0	42,1	43,2	44,3	45,4	46,5	(+/-)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	21,8	22,2	22,6	23,0	23,5	24,0	24,4	24,8	(+/-)0,5

В115. Брюки медицинские женские модель 503.

Описание модели

Брюки медицинские женские прямого силуэта, умеренного объема.

Передняя половина брюк с притачным поясом шириной 3,4-3,6 см, застегивающимся спереди на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу, с молнией-застежкой в среднем шве и двумя талиевыми вытачками

Задняя половина брюк с притачным поясом шириной 3,4-3,6 см.

Вдоль застежки по правой половине брюк должна быть проложена строчка на расстоянии 1,8 – 2,0 см от края.

По среднему шву брюк, по краям пояса передней половины брюк и швам его притачивания должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1 – 0,2 см от края шва.

Пояс задней половины брюк должен быть отстрочен на 5-игольной спецмашине цепного стежка пятью параллельными строчками с расстоянием между ними 0,6-0,7см.

По низу брюк должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы пластиковая молния-застежка и пластиковая пуговица диаметром 1,7 – 1,9 см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 389 из 529



Рисунок В115– Брюки медицинские женские модель 503

Таблица В115.1 Спецификация деталей кроя Брюки медицинские женские модель 503

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Передняя половинка	2	1
2	Задняя половинка	2	1
3	Задний пояс	1	0
4	Левый передний пояс	1	0
5	Правый передний пояс	1	0
Итого		7	2

Таблица В115.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Брюки медицинские женские модель 503

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	99,0	99,2	99,5	99,7	100,0	100,2	100,5	100,7	(±)1,0
		164-170	105,0	105,2	105,5	105,7	106,0	106,2	106,5	106,7	
		176-182	108,0	108,2	108,5	108,7	109,0	109,2	109,5	109,7	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	76,0	75,5	75,0	74,5	74,0	73,5	72,8	72,1	(±)1,0
		164-170	82,0	81,5	81,0	80,5	80,0	79,5	78,8	78,1	
		176-182	85,0	84,5	84,0	83,5	83,0	82,5	81,8	81,1	
3	Ширина на уровне талии, см	все роста	37,5	39,5	41,7	44,0	46,1	48,2	50,5	53,1	(±)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	29,0	30,1	31,3	32,5	33,7	34,9	36,0	37,1	(±)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	18,6	19,0	19,4	19,8	20,2	20,6	21,0	21,4	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Продолжение Таблицы В115.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	101,0	101,2	101,4	101,6	101,8	102,0	102,2	102,4	(±)1,0
		164-170	107,0	107,2	107,4	107,6	107,8	108,0	108,2	108,4	
		176-182	110,0	110,2	110,4	110,6	110,8	111,0	111,2	111,4	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	71,4	70,7	70,0	69,3	68,6	68,0	67,5	67,0	(±)1,0
		164-170	77,4	76,7	76,0	75,3	74,6	74,0	73,5	73,0	
		176-182	80,4	79,7	79,0	78,3	77,6	77,0	76,5	76,0	
3	Ширина на уровне талии, см	все роста	55,4	57,6	59,8	62,0	64,2	66,3	68,4	70,5	(±)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	38,2	39,3	40,5	41,6	42,7	43,8	44,9	46,0	(±)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	21,8	22,2	22,6	23,0	23,5	24,0	24,4	24,8	(±)0,5

В116. Брюки медицинские женские модель 508.

Описание модели

Брюки медицинские женские прямого силуэта, слегка зауженные книзу, умеренного объема, с боковыми вставками – «лампасами», состоящими из двух полосок разной ширины, 5,8-6,0 см в готовом виде.

Верхний срез брюк должен быть обработан притачным поясом шириной 3,4-3,6 см.

Лампасы брюк должны быть выполнены из отделочных тканей двух цветов.

Пояс брюк должен быть отстрочен по всей длине на 5-игольной спецмашине цепного стежка пятью параллельными строчками с расстоянием между ними 0,6-0,7 см.

По швам стачивания частей лампасов брюк и по швам их притачивания должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу брюк должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3 – 1,5 см от края.


Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоцелевого использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 391 из 529

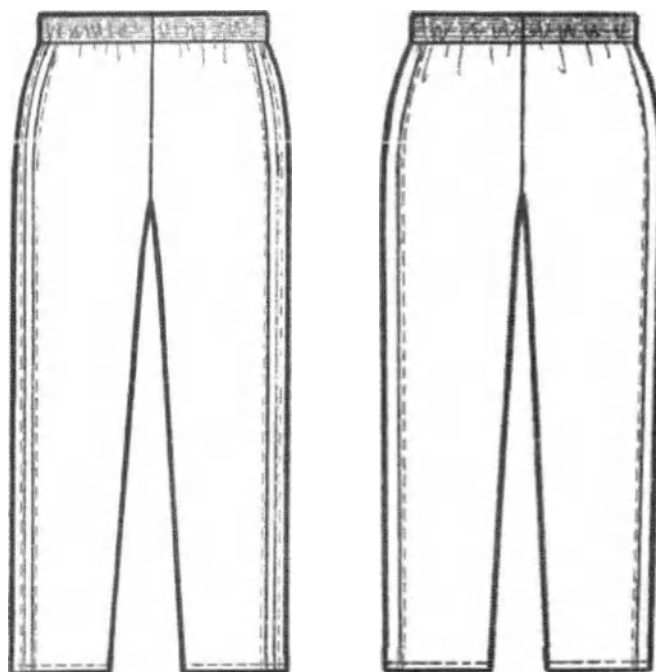

исунок В116– Брюки медицинские женские модель 508

Таблица В116.1 Спецификация деталей кроя Брюки медицинские женские модель 508

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Передняя половинка	2	1
2	Задняя половинка	2	1
3	Пояс	2	1
Отделочная ткань №1			
4	Широкая часть лампаса	2	1
Отделочная ткань №2			
5	Узкая часть лампаса	2	1
Итого		10	5

Таблица В116.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Брюки медицинские женские модель 508

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина по боковому шву. см	152-158	97,8	98,0	98,3	98,5	98,8	99,0	99,3	99,5	(+/-)1,0
		164-170	103,8	104,0	104,3	104,5	104,8	105,0	105,3	105,5	
		176-182	106,8	107,0	107,3	107,5	107,8	108,0	108,3	108,5	
2	Длина по шаговому шву. см	152-158	75,5	75,0	74,5	74,0	73,5	73,0	72,3	71,6	(+/-)1,0
		164-170	81,5	81,0	80,5	80,0	79,5	79,0	78,3	77,6	
		176-182	84,5	84,0	83,5	83,0	82,5	82,0	81,3	80,6	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 392 из 529

3	Ширина на уровне талии. см	все роста	41.5	43.5	45.7	48.0	50.1	52.2	54.5	57.1	(+/-)1.0
4	Ширина на уровне среднего шва. см	все роста	28.9	30.0	31.2	32.3	33.5	34.6	35.7	36.9	(+/-)0.5
5	Ширина внизу. см	все роста	18.8	19.2	19.6	20.0	20.4	20.8	21.2	21.6	(+/-)0.5

Продолжение Таблицы В116.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву. см	152-158	99.8	100.0	100.2	100.4	100.6	100.8	101.0	101.2	(+)1.0
		164-170	105.8	106.0	106.2	106.4	106.6	106.8	107.0	107.2	
		176-182	108.8	109.0	109.2	109.4	109.6	109.8	110.0	110.2	
2	Длина по шаговому шву. см	152-158	70.9	70.2	69.5	68.8	68.1	67.3	67.0	66.5	(+)1.0
		164-170	76.9	76.2	75.5	74.8	74.1	73.3	73.0	72.5	
		176-182	79.9	79.2	78.5	77.8	77.1	76.3	76.0	75.5	
3	Ширина на уровне талии. см	все роста	59.4	61.6	63.8	66.0	68.2	70.3	72.4	74.5	(+)1.0
4	Ширина на уровне среднего шва. см	все роста	38.0	39.1	40.3	41.4	42.5	43.6	44.7	45.8	(+)0.5
5	Ширина внизу. см	все роста	22.0	22.4	22.8	23.2	23.7	24.2	24.6	25.0	(+)0.5

В117. Брюки медицинские женские модель 517.

Описание модели

Брюки медицинские женские зауженные книзу, малого объема, из белой или гладкокрашеной ткани.

Верхний срез брюк с притачным поясом шириной 3,5-3,7 см, застегивающимся на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу, с пятью шлевками для ремня. Брюки с застежкой на тесьму-молнию в среднем шве передней половины.

Передняя половина с боковыми карманами с отрезными бочками и фигурными входами, отстроченными двойными отделочными строчками на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см от края. В углах карманов должны быть установлены металлические хольнитены. Вдоль застежки с правой стороны должна быть проложена строчка на расстоянии 2,0-2,2 см от края.

Задняя половина брюк с двумя накладными карманами фигурной формы. Карманы настрочены двойными строчками на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см от края. Так же двойные отделочные строчки проходят по верхнему краю карманов. В углах карманов должны быть установлены металлические хольнитены.

По среднему заднему и боковым швам должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см от шва.

По переднему среднему шву, краям шлевок и шву притачивания пояса к передней половине брюк должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Пояс задней половины брюк с резинкой внутри и отстрочен на 5-игольной спецмашине цепного стежка пятью параллельными строчками с расстоянием между ними 0,6-0,7 см.

Низ изделия подшит швом вподгибку с закрытым срезом, строчка должна проходить на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические хольнитены диаметром 0,5-0,6 см, пластиковая тесьма-молния и пластиковая пуговица диаметром 1,7-1,9 см.

Нитки для изготовления изделия должны использоваться в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

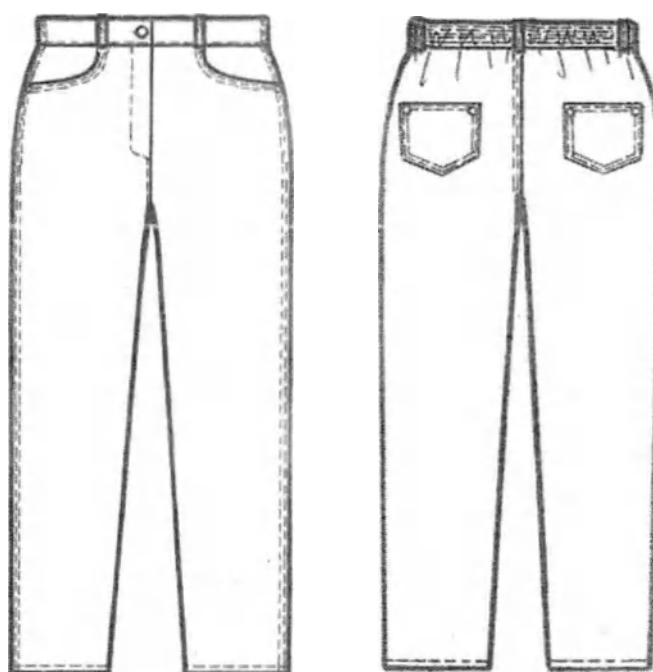


Рисунок В117– Брюки медицинские женские модель 517

Таблица В117.1 Спецификация деталей кроя Брюки медицинские женские модель 517

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Передняя половинка	2	1
2	Задняя половинка	2	1
3	Мешковина кармана	2	1
4	Бочок передней половинки, цельновыкроенный с мешковиной	2	1
5	Пояс левой передней половинки	1	0

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 394 из 529

6	Пояс правой передней половинки	1	0
7	Задний пояс	1	0
8	Задний карман	2	1
9	Шлевки	1	0
Итого		14	5

Таблица В117.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Брюки медицинские женские модель 517

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	98,5	98,7	99,0	99,2	99,5	99,7	100,0	100,2	(±)1,0
		164-170	104,5	104,7	105,0	105,2	105,5	105,7	106,0	106,2	
		176-182	107,5	107,7	108,0	108,2	108,5	108,7	109,0	109,2	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	76,7	76,2	75,7	75,2	74,7	74,2	73,5	72,8	(±)1,0
		164-170	82,7	82,2	81,7	81,2	80,7	80,2	79,5	78,8	
		176-182	85,7	85,2	84,7	84,2	83,7	83,2	82,5	81,8	
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	38,3	40,3	42,2	44,1	45,9	47,8	50,0	52,5	(±)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	28,4	29,5	30,7	31,8	33,0	34,1	35,2	36,4	(±)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	17,8	18,2	18,6	19,0	19,4	19,8	20,2	20,6	(±)0,5

Продолжение Таблицы В117.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	100,5	100,7	100,9	101,1	101,3	101,5	101,7	101,9	(±)1,0
		164-170	106,5	106,7	106,9	107,1	107,3	107,5	107,7	107,9	
		176-182	109,5	109,7	109,9	110,1	110,3	110,5	110,7	110,9	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	72,1	71,4	70,7	70,0	69,3	68,7	68,2	67,7	(±)1,0
		164-170	78,1	77,4	76,7	76,0	75,3	74,7	74,2	73,7	
		176-182	81,1	80,4	79,7	79,0	78,3	77,7	77,2	76,7	
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	55,0	57,5	60,0	62,5	65,0	67,5	70,0	72,5	(±)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	37,5	38,6	39,8	40,9	42,0	43,1	44,2	45,3	(±)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	21,0	21,4	21,8	22,2	22,7	23,2	23,6	24,0	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 395 из 529

В118. Брюки медицинские женские модель 519.

Описание модели

Брюки медицинские женские зауженные книзу, умеренного объема.

Верхний срез брюк должен быть обработан притачным поясом шириной 3,4-3,6 см.

Передняя половина брюк с двумя косыми подрезами, выходящими из шва притачивания пояса и заканчивающимися в боковых швах; с карманами в швах подрезов.

Пояс брюк должен быть отстрочен по всей длине на 5-игольной спецмашине цепного стежка пятью параллельными строчками с расстоянием между ними 0,6-0,7 см.

Линии входов в карманы должны быть отстрочены двумя строчками с расстоянием 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см от края.

По низу брюк должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182

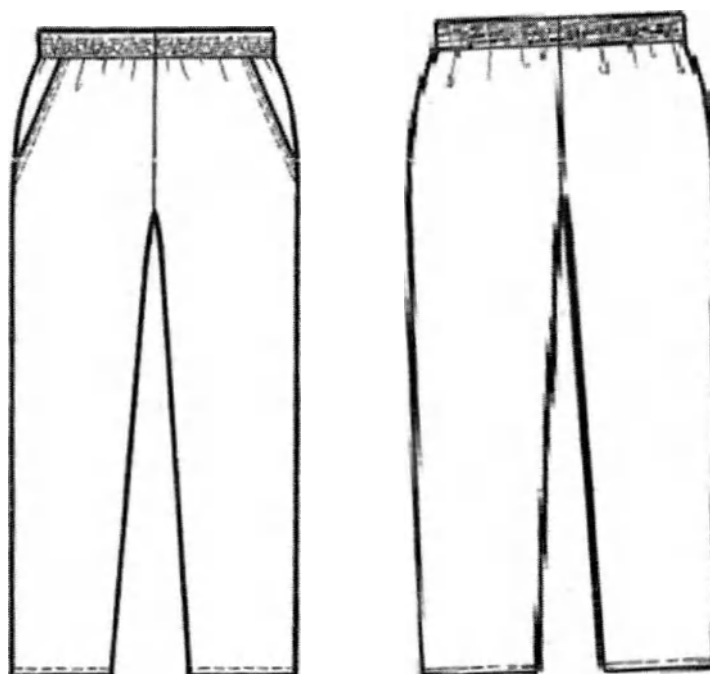


Рисунок В118– Брюки медицинские женские модель 519

Таблица В118.1 Спецификация деталей кроя Брюки медицинские женские модель 519

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет. кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Передняя половинка	2	1
2	Задняя половинка	2	1
3	Мешковина кармана	2	1

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 396 из 529

4	Бочок передней половинки, цельновыкроенный с мешковиной	2	1
5	Пояс	2	1
Итого		10	5

Таблица В118.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Брюки медицинские женские модель 519

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	99.0	99.2	99.5	99.7	100.0	100.2	100.5	100.7	(±)1.0
		164-170	105.0	105.2	105.5	105.7	106.0	106.2	106.5	106.7	
		176-182	108.0	108.2	108.5	108.7	109.0	109.2	109.5	109.7	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	76.0	75.5	75.0	74.5	74.0	73.5	72.8	72.1	(±)1.0
		164-170	82.0	81.5	81.0	80.5	80.0	79.5	78.8	78.1	
		176-182	85.0	84.5	84.0	83.5	83.0	82.5	81.8	81.1	
3	Ширина на уровне талии, см	все роста	41.5	43.5	45.7	48.0	50.1	52.2	54.5	57.1	(±)1.0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	28.9	30.0	31.2	32.3	33.5	34.6	35.7	36.9	(±)0.5
5	Ширина внизу, см	все роста	18.8	19.2	19.6	20.0	20.4	20.8	21.2	21.6	(±)0.5

Продолжение Таблицы В118.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	101.0	101.2	101.4	101.6	101.8	102.0	102.2	102.4	(±)1.0
		164-170	107.0	107.2	107.4	107.6	107.8	108.0	108.2	108.4	
		176-182	110.0	110.2	110.4	110.6	110.8	111.0	111.2	111.4	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	71.4	70.7	70.0	69.3	68.6	68.0	67.5	67.0	(±)1.0
		164-170	77.4	76.7	76.0	75.3	74.6	74.0	73.5	73.0	
		176-182	80.4	79.7	79.0	78.3	77.6	77.0	76.5	76.0	
3	Ширина на уровне талии, см	все роста	59.4	61.6	63.8	66.0	68.2	70.3	72.4	74.5	(±)1.0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	38.0	39.1	40.3	41.4	42.5	43.6	44.7	45.8	(±)0.5
5	Ширина внизу, см	все роста	22.0	22.4	22.8	23.2	23.7	24.2	24.6	25.0	(±)0.5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 397 из 529

B119. Брюки медицинские женские модель 521.

Описание модели

Брюки медицинские женские зауженные к низу, умеренного объема.

Низ брюк обработан подгибкой шириной 2,7-2,9 см.

Верхний край брюк обработан притачным поясом шириной 3,4-3,6 см.

Передняя половина брюк с двумя косыми подрезами, выходящими из шва притачивания пояса и заканчивающимися в боковых швах; с карманами в швах подрезов; с декоративной полоской-шлевкой шириной 0,9-1,1 см, вшитой в подгибку низа. Шлевка должна располагаться вдоль бокового шва и заканчиваться вверх петлей, в которую продето украшение для изделия металлическое.

Задняя половина брюк с двумя накладными карманами фигурной формы и двумя фигурными клапанами, пристегивающимися к карманам с помощью кнопок.

Пояс брюк должен быть отстрочен на 5-игольной спецмашине цепного стежка пятью параллельными строчками с расстоянием между ними 0,6-0,7 см.


Края клапанов, линии входов в карманы и швы настрачивания клапанов и карманов должны быть отстрочены двумя строчками с расстоянием 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см от края или шва.

Декоративная шлевка должна быть отстрочена по краям на расстоянии 0,1-0,2 см.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,1-1,3 см и украшения для изделия металлические шириной 1,0-1,3 см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

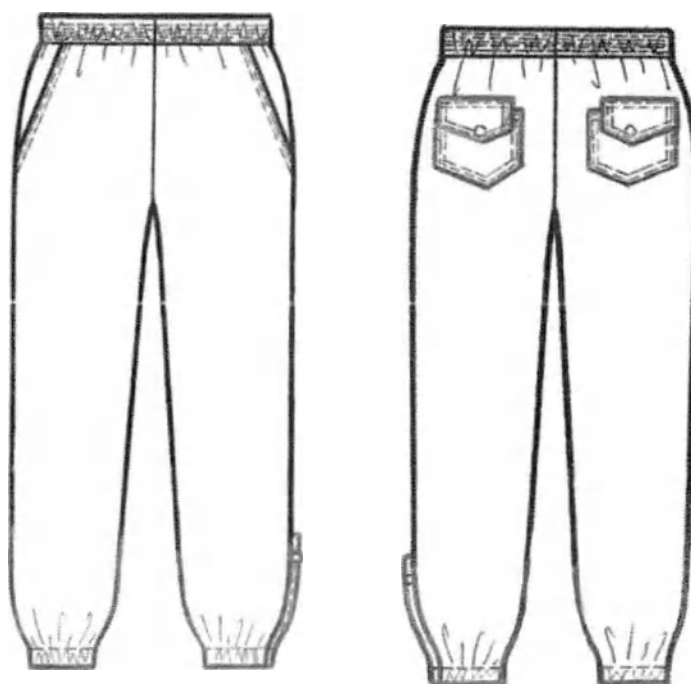

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 398 из 529

Рисунок В119–Брюки медицинские женские модель 521

Таблица В119.1 Спецификация деталей кроя Брюки медицинские женские модель 521

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Передняя половинка	2	1
2	Задняя половинка	2	1
3	Пояс	2	1
4	Бочок передней половинки с мешковиной	2	1
5	Мешковина кармана	2	1
6	Шлевка	1	0
7	Карман задний	2	1
8	Клапан	4	2
Итого		17	8

Таблица В119.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Брюки медицинские женские модель 521

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	98,0	98,2	98,5	98,7	99,0	99,2	99,5	99,7	(±)1,0
		164-170	104,0	104,2	104,5	104,7	105,0	105,2	105,5	105,7	
		176-182	107,0	107,2	107,5	107,7	108,0	108,2	108,5	108,7	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	75,5	75,0	74,5	74,0	73,5	73,0	72,3	71,6	(±)1,0
		164-170	81,5	81,0	80,5	80,0	79,5	79,0	78,3	77,6	
		176-182	84,5	84,0	83,5	83,0	82,5	82,0	81,3	80,6	
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	43,5	45,5	47,7	50,0	52,1	54,2	56,5	59,1	(±)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	28,9	30,0	31,2	32,3	33,5	34,6	35,7	36,9	(±)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	19,3	19,7	20,1	20,5	20,9	21,3	21,7	22,1	(±)0,5

Продолжение Таблицы В119.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	100,0	100,2	100,4	100,6	100,8	101,0	101,2	101,4	(±)1,0
		164-170	106,0	106,2	106,4	106,6	106,8	107,0	107,2	107,4	
		176-182	109,0	109,2	109,4	109,6	109,8	110,0	110,2	110,4	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	70,9	70,2	69,5	68,8	68,1	67,5	67,0	66,5	(±)1,0
		164-170	76,9	76,2	75,5	74,8	74,1	73,5	73,0	72,5	
		176-182	79,9	79,2	78,5	77,8	77,1	76,5	76,0	75,5	
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	61,4	63,6	65,8	68,0	70,2	72,3	74,4	76,5	(±)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	38,0	39,1	40,3	41,4	42,5	43,6	44,7	45,8	(±)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	22,5	22,9	23,3	23,7	24,2	24,7	25,1	25,5	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В120. Брюки медицинские женские модель 524.

Описание модели

Брюки медицинские женские, укороченные, малого объема из гладкокрашеной ткани.

Верхний срез брюк с притачным поясом шириной 3,5-3,7 см, застегивающимся на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу, с пятью шлевками для ремня. Брюки с застежкой на тесьму-молнию в среднем шве передней половины.

Передняя половина с боковыми карманами с отрезными бочками и дугообразными входами, отстроченными на расстоянии 0,6-0,7 см от края. Вдоль застежки с правой стороны должна быть проложена строчка на расстоянии 3,0-3,3 см от края.

Задняя половина брюк с двумя талиевыми вытачками. Пояс задней половины брюк с резинкой внутри и отстрочен на 6-игольной спецмашине цепного стежка шестью параллельными строчками с расстоянием между ними 0,6-0,7 см.

По краям шлевок и шву притачивания пояса к передней половине брюк должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

Низ изделия подшит швом вподгибку, строчка должна проходить на расстоянии 2,4-2,6 см от подогнутого края.

На подгибку низа у левого бокового шва может быть закреплен (по желанию заказчика) металлический логотип на репсовой ленте контрастного цвета.

В качестве фурнитуры должна использоваться пластиковая тесьма-молния в тональном сочетании с цветом ткани и пластиковая пуговица диаметром 1,8 см.

Нитки для изготовления изделия должны использоваться в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

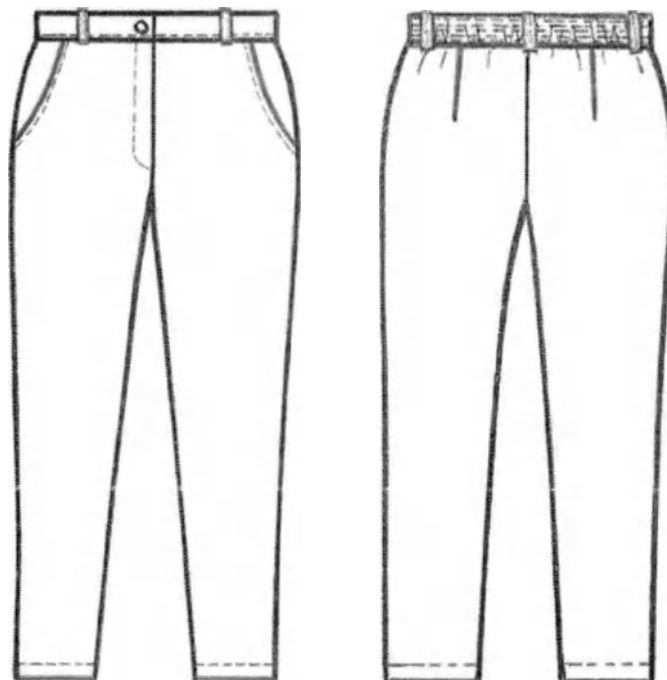


Рисунок В120–Брюки медицинские женские модель 524

Таблица В120.1 Спецификация деталей кроя Брюки медицинские женские модель 524

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Передняя половинка брюк	2	1
2	Задняя половинка брюк	2	1
3	Пояс левой передней половинки	1	0
4	Пояс правой передней половинки	1	0
5	Задний пояс	1	0
6	Подзор бокового кармана	2	1
7	Откосок	1	0
8	Обтачка застежки правой передней половинки брюк	1	0
9	Шлевка	1	0
Подкладочная ткань			
10	Верхняя мешковина кармана	2	1
11	Нижняя мешковина кармана (с бочком)	2	1
Прокладочный материал (клеевая)			
12	Пояс левой передней половинки	1	0
13	Пояс правой передней половинки	1	0
14	Обтачка застежки правой передней половинки брюк	1	0
15	Клеевая на входы в карманы	2	1
16	Клеевая под застежку левой половинки брюк	1	0
ИТОГО		22	6

Таблица В120.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Брюки медицинские женские модель 524

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	88.3	88.5	88.7	89.0	89.3	89.6	89.9	90.2	(+/-1)
		164-170	94.3	94.5	94.7	95.0	95.3	95.6	95.9	96.2	
		176-182	97.3	97.5	97.7	98.0	98.3	98.6	98.9	99.2	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	66.0	65.7	65.3	65.0	64.7	64.3	63.8	63.3	(+/-1)
		164-170	72.0	71.7	71.3	71.0	70.7	70.3	69.8	69.3	
		176-182	75.0	74.7	74.3	74.0	73.7	73.3	72.8	72.3	
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	36.5	38.7	40.9	43.1	45.3	47.5	50.0	52.5	(+/-1)
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	27.5	28.6	29.7	30.8	31.9	33.0	34.1	35.3	(+/-)0.5
5	Ширина внизу, см	все роста	13.6	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6	17.2	17.9	(+/-)0.5

Продолжение Таблицы В120.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	90.5	90.8	91.0	91.3	91.6	91.8	92.0	92.2	(+/-1)
		164-170	96.5	96.8	97.0	97.3	97.6	97.8	98.0	98.2	
		176-182	99.5	99.8	100	100.3	100.6	100.8	101	101.2	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	62.8	62.3	61.8	61.3	60.8	60.3	59.8	59.3	(+/-1)
		164-170	68.8	68.3	67.8	67.3	66.8	66.3	65.8	65.3	
		176-182	71.8	71.3	70.8	70.3	69.8	69.3	68.8	68.3	
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	55.0	57.5	60.0	62.5	65.0	67.5	70.0	72.5	(+/-1)
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	36.5	37.7	38.9	40.1	41.3	42.5	43.7	44.9	(+/-)0.5
5	Ширина внизу, см	все роста	18.6	19.3	20.0	20.7	21.4	22.1	22.8	23.5	(+/-)0.5

В121. Брюки медицинские женские модель 525.

Описание модели

Брюки медицинские женские укороченные из белой или гладкокрашеной эластичной ткани.

Верхний срез брюк с притачным поясом шириной 3,5-3,7 см, застегивающимся на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу, с застежкой на тесьму-молнию в среднем шве передней половины.

Передняя половина с боковыми карманами с отрезными бочками и фигурными входами, обработанными косой бейкой из отделочной набивной ткани. Внутренняя сторона переднего пояса так же выполнена из отделочной набивной ткани. Вдоль застежки на правой половинке брюк проложена строчка на расстоянии 2,4-2,6 см от края.

Задняя половина брюк с двумя таллиевыми выточками и двумя накладными карманами фигурной формы. Пояс задней половины брюк с вложенной внутрь него резинкой и отстроченный на 6-игольной спецмашине цепного стежка шестью параллельными строчками с расстоянием между ними 0,6-0,7 см.

Низ брючин фигурный и обработан обтачками из отделочной набивной ткани. Внутренние срезы обтачек закреплены сквозными строчками.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Вдоль шва притачивания пояса к передней половине брюк и по швам настрачивания карманов задней половины брюк проложены строчки на расстоянии 0,1- 0,2 см от шва.

По верхнему краю задних карманов проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от подогнутого края.

В качестве фурнитуры используются пластиковая тесьма-молния в тональном сочетании с цветом основной ткани и пластиковая пуговица диаметром 1,8 см.

Нитки для изготовления изделия должны использоваться в тональном сочетании с цветом основной ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

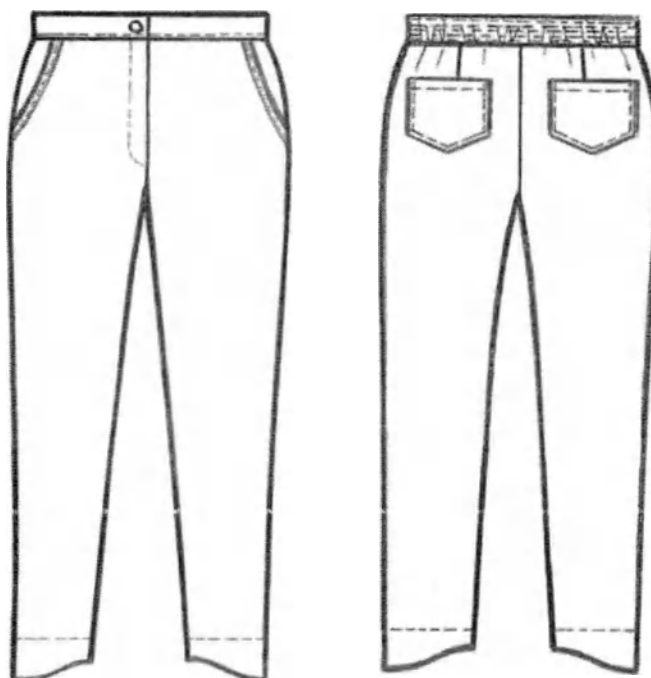


Рисунок В121– Брюки медицинские женские модель 525

Таблица В121.1 Спецификация деталей кроя Брюки медицинские женские модель 525

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Передняя половинка	2	1
2	Задняя половинка	2	1
3	Мешковина кармана	2	1
4	Бочок передней половинки, цельновыкроенный с мешковиной	2	1

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
5	Пояс левой передней половинки	1	0
6	Пояс правой передней половинки	1	0
7	Задний пояс	1	0
8	Задний карман	2	1
Отделочная ткань			
9	Обтачка низа передней половинки брюк	2	1
10	Обтачка низа задней половинки брюк	2	1
11	Пояс левой передней половинки (внутренняя часть)	1	0
12	Пояс правой передней половинки (внутренняя часть)	1	0
13	Косая бейка для окантовки входов в карманы	1	0
Прокладочный материал (клеевая)			
14	Пояс левой передней половинки	2	1
15	Пояс правой передней половинки	2	1
16	Клеевая под застежку правой половинки	1	0
17	Клеевая под застежку левой половинки	1	0
ИТОГО		26	9

Таблица В121.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Брюки медицинские женские модель 525

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	93,8	94,1	94,4	94,7	95,0	95,2	95,5	98,5	(+/-1)
		164-170	99,8	100,1	100,4	100,7	101,0	101,2	101,5	101,8	
		176-182	102,8	103,1	103,4	103,7	104,0	104,2	104,5	104,8	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	66,5	66,2	65,9	65,6	65,3	64,8	64,3	63,8	(+/-1)
		164-170	72,5	72,2	71,9	71,6	71,3	70,8	70,3	69,8	
		176-182	75,5	75,2	74,9	74,6	74,3	73,8	73,3	72,8	
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	38	40,2	42,4	44,6	46,8	49,0	51,2	53,7	(+/-1)
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	27,5	28,7	29,9	31,0	32,1	33,3	34,5	35,7	(+/-)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	15,3	15,9	16,5	17,1	17,7	18,3	19,0	19,7	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В121.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	96,1	96,4	96,7	97,0	97,3	97,6	97,9	98,2	(+/-1)
		164-170	102,1	102,4	102,7	103,0	103,3	103,6	103,9	104,2	
		176-182	105,1	105,4	105,7	106,0	106,3	106,6	106,9	107,2	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	63,3	62,8	62,3	61,8	61,3	60,8	60,3	59,8	(+/-1)
		164-170	69,3	68,8	68,3	67,8	67,3	66,8	66,3	65,8	
		176-182	72,3	71,8	71,3	70,8	70,3	69,8	69,3	68,8	
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	56,2	58,7	61,2	63,7	66,2	68,7	71,2	73,7	(+/-1)
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	36,9	38,1	39,3	40,5	41,7	42,9	44,1	44,3	(+/-)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	20,4	21,1	21,8	22,5	23,2	23,9	24,6	25,3	(+/-)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

B122. Брюки медицинские женские модель 526.

Описание модели

Брюки медицинские женские, малого объема из белой или гладкокрашеной эластичной ткани.

Верхний срез брюк с притачным поясом шириной 3,5-3,7 см, застегивающимся на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу, с застежкой на тесьму-молнию в среднем шве передней половины.

Вдоль застежки на правой половинке брюк проложена строчка на расстоянии 2,5-2,7 см от края.

Задняя половина брюк с двумя рельефными швами, проходящими по средним линиям правой и левой задних половинок. Рельефные швы внизу заканчиваются разрезами длиной 7,5-7,7 см. В начале разрезов выполнена поперечная закрепка длиной 0,8 см.

Пояс задней половины брюк с резинкой внутри и отстрочен на 6-игольной спецмашине цепного стежка шестью параллельными строчками с расстоянием между ними 0,6-0,7 см.

По краям разрезов и шву притачивания пояса к передним половинкам брюк проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

Низ изделия подшит швом вподгибку с закрытым срезом, строчка должна проходить на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры использованы пластиковая тесьма-молния в тональном сочетании с цветом ткани и пластиковая пуговица диаметром 1,8 см.

Нитки для изготовления изделия должны использоваться в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.



Рисунок В122– Брюки медицинские женские модель 526

Таблица В122.1 Спецификация деталей кроя Брюки медицинские женские модель 526

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Передняя половинка	2	1
2	Центральная часть задней половинки	2	1
3	Боковая часть задней половинки	2	1
4	Пояс левой передней половинки	1	0
5	Пояс правой передней половинки	1	0
6	Задний пояс	1	0
Прокладочный материал (клеевая)			
7	Пояс левой передней половинки	1	0
8	Пояс правой передней половинки	1	0
9	Клеевая под застежку правой половинки	1	0
10	Клеевая под застежку левой половинки	1	0
ИТОГО		13	3

Таблица В122.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Брюки медицинские женские модель 526

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	96,5	96,7	96,8	96,9	97,0	97,1	97,2	97,3	(±1)
		164-170	102,5	102,7	102,8	102,9	103,0	103,1	103,2	103,3	
		176-182	105,5	105,7	105,8	105,9	106,0	106,1	106,2	106,3	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	70,5	70,3	70,0	69,8	69,5	69,3	69,1	68,8	(±1)
		164-170	76,5	76,3	76,0	75,8	75,5	75,3	75,1	74,8	
		176-182	79,5	79,3	79,0	78,8	78,5	78,3	78,1	77,8	
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	37	39	41	43	45	47	49	51	(±1)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	26,6	27,7	28,8	29,9	31,0	32,1	33,1	34,2	(+/-)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	16,0	16,4	16,8	17,3	17,5	17,9	18,3	18,7	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В122.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	97,4	97,5	97,6	97,7	97,9	98,0	98,1	98,2	(±1)
		164-170	103,4	103,5	103,6	103,7	103,9	104,0	104,1	104,2	
		176-182	106,4	106,5	106,6	106,7	106,9	107,0	107,1	107,2	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	68,5	68,3	68,0	67,8	67,7	67,5	67,3	67,0	(±1)
		164-170	74,5	74,3	74,0	73,8	73,7	73,5	73,3	73,0	
		176-182	77,5	77,3	77,0	76,8	76,7	76,5	76,3	76,0	
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	53	55	57,2	59,4	61,6	63,8	66,0	68,2	(±1)
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	35,3	36,4	37,6	38,8	40,0	41,2	42,4	43,6	(+/-)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	19,2	19,7	20,1	20,5	21,0	21,4	21,8	22,2	(+/-)0,5

В123. Брюки медицинские женские модель 529.

Описание модели

Брюки медицинские женские из белой или гладкоокрашенной ткани длиной до щиколотки, зауженные к низу, малого объема, с пятью шлевками для пояса.

Передняя половина брюк с притачным поясом шириной 4,1-4,3 см, застегивающимся на 1 обметанную петлю и 1 пуговицу, с застежкой в среднем шве на тесьму-«молнию»; с закругленными подрезами, выходящими из шва притачивания пояса и заканчивающиеся в боковых швах; с карманами в швах подрезов.

Задняя половина брюк с притачным поясом шириной 3,9-4,1 смс вложенной внутрь эластичной тесьмой и двумя накладными карманами фигурной формы. В подгибку низа задней половины брюк должна быть вложена эластичная тесьма. В верхних углах карманов должны быть установлены закрепки на спецмашине.

По среднему шву брюк, краям шлевок, шву притачивания переднего пояса, линиям входа в передние карманы и швам настрачивания задних карманов должны быть проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

Вдоль застежки с правой стороны должна быть проложена строчка на расстоянии 2,3-2,5 см от края.

По верхним краям задних карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 4,2-4,4 см от подогнутого края.

В качестве фурнитуры должны использоваться: тесьма-«молния» в тональном сочетании с цветом ткани и пластмассовая пуговица диаметром 1,7-1,9 см.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

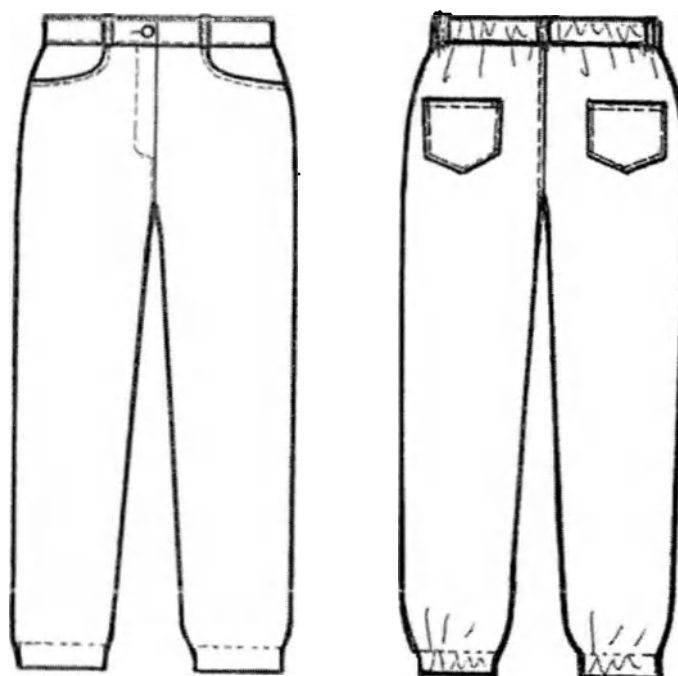


Рисунок В123– Брюки медицинские женские модель 529

Таблица В123.1 Спецификация деталей кроя Брюки медицинские женские модель 529

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Передняя половинка	2	1
2	Задняя половинка	2	1
3	Мешковина кармана	2	1
4	Бочок передней половинки, цельновыкроенный с мешковиной	2	1
5	Пояс левой передней половинки	1	0
6	Пояс правой передней половинки	1	0
7	Задний пояс	1	0
8	Задний карман	2	1
9	Шлевка	1	0
	ИТОГО	14	5

Таблица В123.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Брюки медицинские женские модель 529

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	92.5	92.7	93.0	93.2	93.5	93.7	94.0	94.2	(+/-)
		164-170	98.5	98.7	99.0	99.2	99.5	99.7	100.0	100.2	
		176-182	101.5	101.7	102.0	102.2	102.5	102.7	103.0	103.2	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	68.7	68.2	67.7	67.2	66.7	66.2	65.5	64.8	(+/-)
		164-170	74.7	74.2	73.7	73.2	72.7	72.2	71.5	70.8	
		176-182	77.7	77.2	76.7	76.2	75.7	75.2	74.5	73.8	
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	39.5	41.5	43.5	45.5	47.5	49.5	51.5	54.0	(+/-)
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	28.6	29.7	30.9	32.0	33.2	34.3	35.4	36.6	(+/-)0.5
5	Ширина внизу, см	все роста	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	(+/-)0.5

Продолжение Таблицы В123.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	94.5	94.7	94.9	95.1	95.3	95.5	95.7	95.9	(+/-)
		164-170	100.5	100.7	100.9	101.1	101.3	101.5	101.7	101.9	
		176-182	103.5	103.7	103.9	104.1	104.3	104.5	104.7	104.9	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	64.1	63.4	62.7	62.0	61.3	60.7	60.2	59.7	(+/-)
		164-170	70.1	69.4	68.7	68.0	67.3	66.7	66.2	65.7	
		176-182	73.1	72.4	71.7	71.0	70.3	69.7	69.2	68.7	
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	56.5	59.0	61.5	64.0	66.5	69.0	71.5	74.0	(+/-)
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	37.7	38.8	40.0	41.1	42.2	43.3	44.4	45.5	(+/-)0.5
5	Ширина внизу, см	все роста	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	(+/-)0.5

В124. Брюки медицинские женские модель 532.

Описание модели

Брюки медицинские женские из белой или гладкокрашеной эластичной ткани, умеренного объема, зауженные к низу.

Верхний срез брюк должен быть обработан притачным поясом шириной 3,8-4,0 см с вложенной внутрь эластичной тесьмой.

Передняя половина брюк с двумя косыми подрезами, выходящими из шва притачивания пояса и заканчивающимися в боковых швах; с карманами в швах подрезов.

Пояс брюк должен быть отстрочен по всей длине двумя параллельными строчками на спецмашине цепного стежка: первая строчка должна проходить на расстоянии 0,6-0,8 см от края, вторая строчка на расстоянии 2,5 см от первой.

Вдоль линий входов в карманы должна быть проложена строчка на расстоянии 0,5-0,7 см от края.

По низу брюк должна быть проложена строчка на расстоянии 1,4-1,6 см от края.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

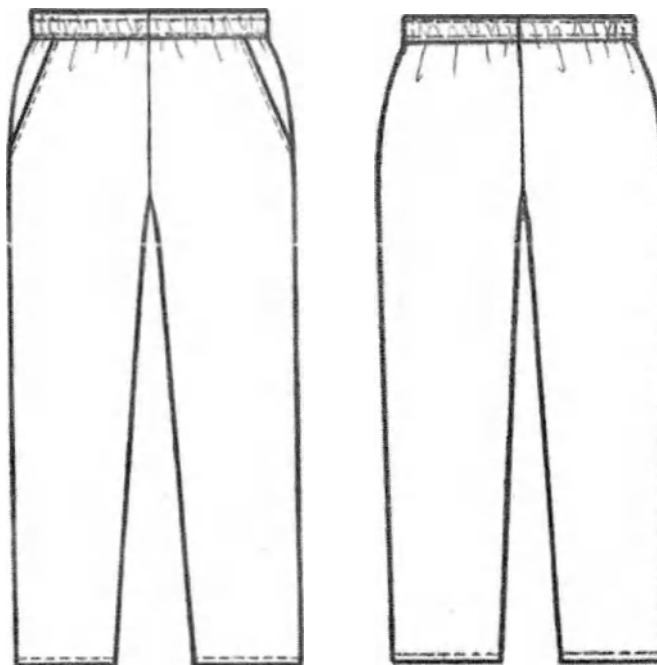


Рисунок В124— Брюки медицинские женские модель 532

Таблица В124.1 Спецификация деталей кроя Брюки медицинские женские модель 532

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Передняя половинка	2	1
2	Задняя половинка	2	1
3	Мешковина кармана	2	1
4	Бочок передней половинки, цельновыкроенный с мешковиной кармана	2	1
5	Пояс	2	1
Прокладочный материал (клеевая)			
6	Полоски на входы в карманы	2	1
ИТОГО		12	6

Таблица В124.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Брюки медицинские женские модель 532

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина по боковому шву, см	152-158 164-170 176-182	104.5	104.7	105.0	105.2	105.5	105.7	106.0	106.2	(+/-)1
2	Длина по шаговому шву, см	152-158 164-170 176-182	83.0	82.5	82.0	81.5	81.0	80.5	79.8	79.1	(+/-)1
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	42.5	44.5	46.7	49.0	51.1	53.2	55.5	58.1	(+/-)1
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	28.9	30.0	31.2	32.3	33.5	34.6	35.7	36.9	(+/-)0.5
5	Ширина внизу, см	все роста	16.0	16.4	16.8	17.2	17.6	18.0	18.4	18.8	(+/-)0.5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Продолжение Таблицы В124.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	152-158 164-170 176-182	106.5	106.7	106.9	107.1	107.3	107.5	107.7	107.9	(+/-1)
2	Длина по шаговому шву, см	152-158 164-170 176-182	78.4	77.7	77.0	76.3	75.6	75.0	74.5	74.0	(+/-1)
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	60.4	62.6	64.8	67.0	69.2	71.3	73.4	75.5	(+/-1)
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	38.0	39.1	40.3	41.4	42.5	43.6	44.7	45.8	(+/-)0.5
5	Ширина внизу, см	все роста	19.2	19.6	20.0	20.5	21.0	21.4	21.8	22.2	(+/-)0.5

В125. Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, женский № 3 в составе:

Описание

Комплект одежды женский для работника скорой помощи состоит из блузы медицинской женской модель: 03 и брюк медицинских женских модель: 03.

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер, полуприлегающего силуэта.

Перед с центральной бортовой застёжкой до верха на 5 кнопок; с притачными кокетками; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа; с двумя косыми подрезами, выходящими из нижней части пройм и заканчивающимися в рельефных швах ниже линии талии; с двумя верхними накладными карманами, передним срезом входящими в рельефные швы на уровне линии груди; с двумя нижними накладными карманами фигурной формы, передние срезы которых входят в швы подрезов и рельефные швы, задние срезы входят в боковые швы, а верхние края обработаны притачными планками шириной 3,4-3,6см; с косыми декоративными подрезами на нижних карманах, выходящими из передних верхних углов и доходящими до низа карманов.

Спинка с притачной кокеткой; с вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с двумя косыми подрезами, выходящими из нижней части пройм и заканчивающимися в рельефных швах ниже линии талии; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скрепленными посередине спинки с помощью кнопки. Для регулировки степени прилегания изделия по талии на правом полупоясе должны быть установлены две нижних части кнопки с расстоянием 2,5см.

Рукава втачные, одношовные, длиной 3/4. Параллельно нижнему краю рукавов застрочены двумя строчками (на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8см от края) защипы, имитирующие отложные манжеты шириной 3,0-3,2см. Для регулировки длины с изнаночной стороны рукавов посередине пришиты паты шириной 2,9-3,1см, на свободных

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 411 из 529

концах треугольной формы которых установлены верхние части кнопок, а на лицевой стороне рукавов в месте крепления пат установлены нижние части кнопок.

Воротник, стояче – отложной, на отрезной стойке, застегивающейся на 1 кнопку.

Верхние части бочков переда и спинки, нижняя стойка воротника и паты рукавов могут быть выполнены из отделочной ткани.

По переду и спинке над швами притачивания кокеток, на рукавах ниже линии глубины проймы может быть настрочена светоотражающая лента шириной 2,5 см.

По центру левого рукава над светоотражающими лентами может быть настрочен шеврон «скорая помощь» диаметром 6,7 см; на спинку под кокеткой может быть настрочен прямоугольный шеврон «скорая помощь» размером 29,0*10,0 см.

По краям бортов, кокеткам, рельефам, подрезам, краям пат, полупоясов, воротника, подрезам карманов и швам их настрачивания, по низу рукавов и швам притачивания планок карманов должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см от края или шва.

По линиям входа в верхние карманы должна быть проложена строчка на расстоянии 1,7-1,9 см от края.

На рукавах в местах крепления пат должны быть проложены строчки в виде квадрата со стороной 3,2-3,4 см и крестообразная строчка.

По швам втачивания стойки в горловину и притачивания стойки к воротнику должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от шва.

По низу блузы должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,1-1,3 см.

Брюки медицинские женские зауженные книзу, умеренного объема.

Верхний срез брюк должен быть обработан притачным поясом шириной 3,4-3,6 см.

Передняя половина брюк с двумя косыми подрезами, выходящими из шва притачивания пояса и заканчивающимися в боковых швах; с карманами в швах подрезов.

По низу брюк, на расстоянии 20-23 см от края, могут быть настрочены 2 ряда светоотражающей ленты шириной 2,5 см.

Пояс брюк должен быть отстрочен по всей длине на 5-игольной спецмашине цепного стежка пятью параллельными строчками с расстоянием между ними 0,6-0,7 см.

Линии входов в карманы должны быть отстрочены двумя строчками с расстоянием 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см от края.

По низу брюк должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоцелевого использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 412 из 529

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом основной и отделочной ткани и цветом светоотражающей ленты.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

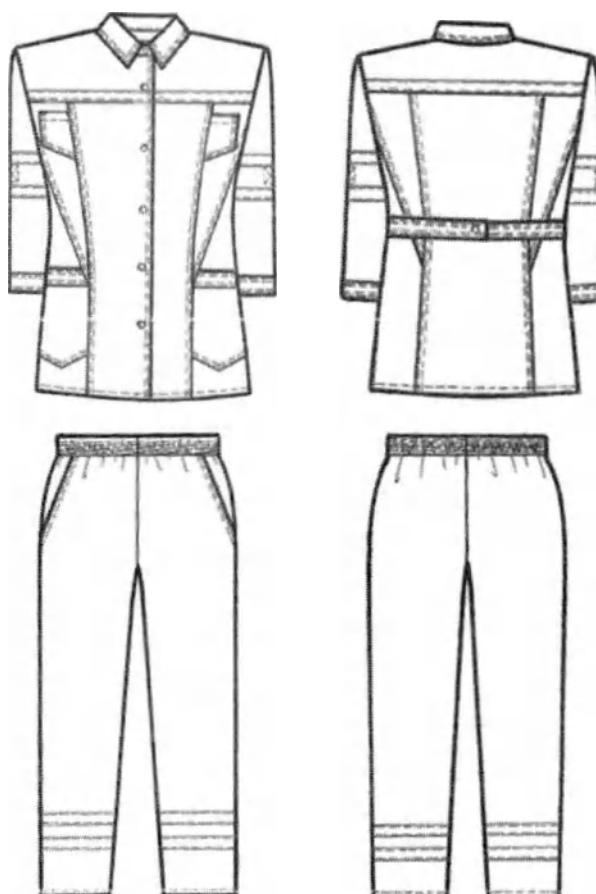


Рисунок В125– Блуза и брюки медицинские женские модель 03

Таблица В125.1 Спецификация деталей кроя
Блуза и брюки медицинские женские модель 03

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет. кроя	Кол-во зеркально
Блуза			
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Спинка	1	0
3	Бочок полочки	2	1
4	Бочок спинки	2	1
5	Рукав	2	1
6	Кокетка полочки	2	1
7	Кокетка спинки	1	0

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет. кроя	Кол-во зеркально
8	Верхний карман	2	1
9	Верхняя часть нижнего кармана	2	1
10	Нижняя часть нижнего кармана	2	1
11	Планка нижнего кармана	2	1
12	Воротник	2	1
13	Подборт	2	1
14	Полупояс	2	1
15	Стойка воротника	1	0
16	Деталь для крепления паты рукава	2	1
Отделочная ткань			
17	Верхняя часть бочка полочки	2	1
18	Верхняя часть бочка спинки	2	1
19	Стойка воротника	2	1
Итого		35	16
Брюки			
Основная ткань			
20	Передняя половинка	2	1
21	Задняя половинка	2	1
22	Мешковина кармана	2	1
23	Бочок передней половинки, цельновыкроенный с мешковиной	2	1
24	Пояс	2	1
Итого		10	5
Итого по комплекту		45	21

Величины основных измерений и допустимые отклонения от них

Таблица В125.2 (БЛУЗА)

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	64,4	64,9	65,4	65,9	66,4	66,8	67,1	67,4	(±)1,0
		164-170	68,4	68,9	69,4	69,9	70,4	70,8	71,1	71,4	
		176-182	70,4	70,9	71,4	71,9	72,4	72,8	73,1	73,4	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	35,7	36,6	37,5	38,4	39,3	40,2	41,1	41,8	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	66,8	67,7	68,5	69,3	70,1	71,0	71,8	72,6	(±)1,0
		164-170	70,8	71,7	72,5	73,3	74,1	75,0	75,8	76,6	
		176-182	72,8	73,7	74,5	75,3	76,1	77,0	77,8	78,6	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	42,8	44,9	47,0	49,1	51,2	53,3	55,4	57,5	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	50,0	52,0	54,0	56,0	58,1	60,2	62,2	64,2	(±)1,0
6	Длина рукава, см	152-158	40,8	41,0	41,2	41,5	41,8	42,1	42,3	42,5	(±)1,0
		164-170	43,8	44,0	44,2	44,5	44,8	45,1	45,3	45,5	
		176-182	45,3	45,5	45,7	46,0	46,3	46,6	46,8	47,0	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 414 из 529

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17.2	17.7	18.3	18.9	19.5	20.2	20.9	21.5	(+/-)0.5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15.9	16.2	16.5	16.7	17.0	17.3	17.7	18.2	(+/-)0.5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	7.3	7.5	7.7	8.0	8.3	8.6	8.9	9.1	(+/-)0.3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	11.2	11.4	11.5	11.6	11.8	11.9	12.0	12.2	(+/-)0.3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	11.4	12.3	13.0	13.8	14.5	15.3	16.2	17.1	(+/-)0.3
12	Глубина нижнего кармана посередине, см	152-158	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	(+/-)0.3
		164-170	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	
		176-182	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	44.5	45.5	46.5	47.5	48.5	49.5	50.5	51.5	(+/-)0.5

Продолжение Таблицы В125.2 (БЛУЗА)

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	67.7	67.9	68.1	68.3	68.5	68.7	68.9	69.1	(+/-)1.0
		164-170	71.7	71.9	72.1	72.3	72.5	72.7	72.9	73.1	
		176-182	73.7	73.9	74.1	74.3	74.5	74.7	74.9	75.1	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	42.6	43.4	44.2	45.0	45.8	46.5	47.2	48.0	(+/-)0.5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	73.4	74.2	75.0	75.8	76.6	77.5	78.4	79.3	(+/-)1.0
		164-170	77.4	78.2	79.0	79.8	80.6	81.5	82.4	83.3	
		176-182	79.4	80.2	81.0	81.8	82.6	83.5	84.4	85.3	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	59.5	61.6	63.7	65.8	67.9	70.0	72.1	74.2	(+/-)1.0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	66.2	68.2	70.2	72.2	74.3	76.4	78.5	80.5	(+/-)1.0
6	Длина рукава, см	152-158	42.7	43.0	43.1	43.2	43.3	43.4	43.5	43.6	(+/-)1.0
		164-170	45.7	46.0	46.1	46.2	46.3	46.4	46.5	46.6	
		176-182	47.2	47.5	47.6	47.7	47.8	47.9	48.0	48.1	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22.2	23.0	23.8	24.6	25.4	26.1	26.7	27.4	(+/-)0.5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	18.7	19.2	19.7	20.3	20.9	21.2	21.7	22.3	(+/-)0.5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	9.4	9.7	10.0	10.3	10.6	10.8	11.0	11.2	(+/-)0.3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12.4	12.6	12.8	13.0	13.3	13.5	13.8	14.5	(+/-)0.3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	18.0	18.9	19.8	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	(+/-)0.3
12	Глубина нижнего кармана посередине, см	152-158	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	(+/-)0.3
		164-170	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	
		176-182	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	52.4	53.4	54.3	55.3	56.3	57.3	58.3	59.3	(+/-)0.5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 415 из 529

Таблица В125.3 (БРЮКИ)

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	99,0	99,2	99,5	99,7	100,0	100,2	100,5	100,7	(±)1,0
		164-170	105,0	105,2	105,5	105,7	106,0	106,2	106,5	106,7	
		176-182	108,0	108,2	108,5	108,7	109,0	109,2	109,5	109,7	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	76,0	75,5	75,0	74,5	74,0	73,5	72,8	72,1	(±)1,0
		164-170	82,0	81,5	81,0	80,5	80,0	79,5	78,8	78,1	
		176-182	85,0	84,5	84,0	83,5	83,0	82,5	81,8	81,1	
3	Ширина на уровне талии, см	все роста	41,5	43,5	45,7	48,0	50,1	52,2	54,5	57,1	(±)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	29,5	30,6	31,8	33,0	34,2	35,4	36,5	37,6	(±)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	18,6	19,0	19,4	19,8	20,2	20,6	21,0	21,4	(±)0,5

Продолжение Таблицы В125.3 (БРЮКИ)

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	101,0	101,2	101,4	101,6	101,8	102,0	102,2	102,4	(±)1,0
		164-170	107,0	107,2	107,4	107,6	107,8	108,0	108,2	108,4	
		176-182	110,0	110,2	110,4	110,6	110,8	111,0	111,2	111,4	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	71,4	70,7	70,0	69,3	68,6	68,0	67,5	67,0	(±)1,0
		164-170	77,4	76,7	76,0	75,3	74,6	74,0	73,5	73,0	
		176-182	80,4	79,7	79,0	78,3	77,6	77,0	76,5	76,0	
3	Ширина на уровне талии, см	все роста	59,4	61,6	63,8	66,0	68,2	70,3	72,4	74,5	(±)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	38,7	39,8	41,0	42,1	43,2	44,3	45,4	46,5	(±)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	21,8	22,2	22,6	23,0	23,5	24,0	24,4	24,8	(±)0,5

В126. Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, женский № 4 в составе

Описание

Комплект одежды женский для работника скорой помощи состоит из блузы медицинской женской модель: 03-5 и брюк медицинских женских модель: 03-5.

Блуза медицинская женская длиной ниже линии бедер, полуприлегающего силуэта.

Перед с центральной бортовой застёжкой до верха на 5 кнопок; с притачными кокетками; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа; с двумя косыми подрезами, выходящими из нижней части пройм и заканчивающимися в рельефных швах ниже линии талии; с двумя верхними накладными карманами, передним срезом входящими в рельефные швы на уровне линии груди; с двумя нижними накладными карманами фигурной формы, передние срезы которых входят в швы подрезов и рельефные швы, задние срезы входят в боковые швы, а верхние края обработаны притачными планками шириной 3,4-3,6см; с косыми декоративными

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

подрезами на нижних карманах, выходящими из передних верхних углов и доходящими до низа карманов.

Спинка с притачной кокеткой; с вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с двумя косыми подрезами, выходящими из нижней части пройм и заканчивающимися в рельефных швах ниже линии талии; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скрепленными посередине спинки с помощью кнопки. Для регулировки степени прилегания изделия по талии на правом полупоясе должны быть установлены две нижних части кнопки с расстоянием 2,5 см.

Рукава втачные, двухшовные, длинные, с разрезами в локтевых швах и притачными манжетами шириной 4,5-4,7 см, застегивающимися на 1 кнопку.

Воротник, стояче-отложной, на отрезной стойке, застегивающейся на 1 кнопку.

По переду и спинке над швами притачивания кокеток, на рукавах ниже линии глубины проймы может быть настрочена светоотражающая лента шириной 2,5 см.

По центру левого рукава над светоотражающими лентами может быть настрочен шеврон «скорая помощь» диаметром 6,7 см; на спинку под кокеткой может быть настрочен прямоугольный шеврон «скорая помощь» размером 29,0*10,0 см.

По кокеткам, рельефам, подрезам, краям полупоясов, воротника, локтевым швам, подрезам карманов и швам их настрачивания, по манжетам и швам притачивания планок карманов должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см от края или шва.

На правой полочке вдоль края борта должна быть проложена строчка на расстоянии 3,4-3,6 см от края.

По линиям входа в верхние карманы должна быть проложена строчка на расстоянии 1,7-1,9 см от края.

По краям бортов, швам втачивания стойки в горловину и притачивания стойки к воротнику должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от шва.

По низу блузы должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,1-1,3 см.

Брюки медицинские женские, слегка зауженные книзу, умеренного объема, с пятью шлевками для пояса.

Передняя половина брюк с притачным поясом шириной 3,4-3,6 см, застегивающимся на одну обметанную петлю и одну пуговицу; с молнией-застежкой в среднем шве; с двумя

талиявыми вытачками; с двумя косыми подрезами, выходящими из шва притачивания пояса и заканчивающимися в боковых швах; с карманами в швах подрезов.

Задняя половина брюк с притачным поясом шириной 3,4-3,6 см.

Пояс задней половины брюк должен быть отстрочен на 5-игольной спецмашине цепного стежка пятью параллельными строчками с расстоянием между ними 0,6-0,7 см.

По линиям входа в карманы должна быть проложена двойная строчка на расстоянии 0,1-0,2 см и 0,7-0,8 см от края.

Вдоль застежки с правой стороны должна быть проложена строчка на расстоянии 2,2-2,5 см.

По заднему среднему шву, краям шлевов и шву притачивания пояса к передней половине брюк должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу брюк должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

На расстоянии 15,0-20,0 см от низа брюк могут быть настроены 2 ряда светоотражающей ленты шириной 2,5 см.

В качестве фурнитуры должны быть использованы молния-застежка, пуговица диаметром 1,7-1,9 см.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

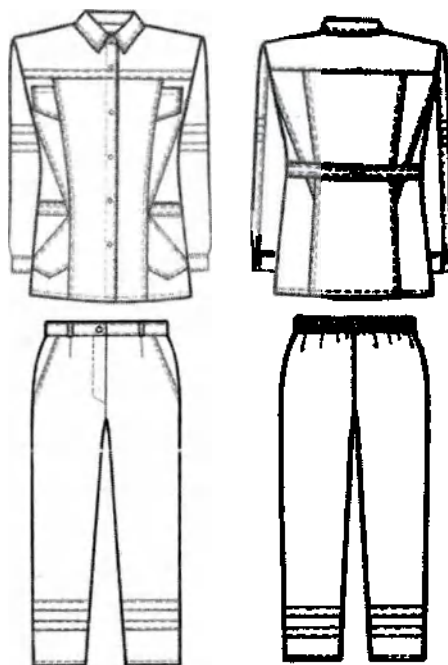


Рисунок В126— Блуза и брюки медицинские женские модель 03-5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 418 из 529

Таблица В126.1 Спецификация деталей кроя
Блуза и брюки медицинские женские модель 03-5

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет. кроя	Кол-во зеркально
Блуза			
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Спинка	1	0
3	Бочок полочки	2	1
4	Бочок спинки	2	1
5	Верхняя часть бочка полочки	2	1
6	Верхняя часть бочка спинки	2	1
7	Кокетка полочки	2	1
8	Кокетка спинки	1	0
9	Передняя часть рукава	2	1
10	Задняя часть рукава	2	1
11	Манжета	2	1
12	Верхний карман	2	1
13	Верхняя часть нижнего кармана	2	1
14	Нижняя часть нижнего кармана	2	1
15	Планка нижнего кармана	2	1
16	Воротник	2	1
17	Стойка	2	1
18	Полупояс	2	1
19	Подборт	2	1
Итого		36	17
Брюки			
Основная ткань			
20	Передняя половинка	2	1
21	Задняя половинка	2	1
22	Бочок передней половинки, цельновыкроенный с мешковиной	2	1
23	Мешковина кармана	2	1
24	Задний пояс	1	0
25	Правый передний пояс	1	0
26	Левый передний пояс	1	0
27	Шлевки	1	0
Итого		12	4
Итого по комплекту		48	21

Величины основных измерений и допустимые отклонения от них

Таблица В126.2 (БЛУЗА)

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 419 из 529

1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	63,6 67,6 69,6	64,1 68,1 70,1	64,6 68,6 70,6	65,1 69,1 71,1	65,6 69,6 71,6	66,0 70,0 72,0	66,3 70,3 72,3	66,6 70,6 72,6	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	36,2	37,1	38,0	38,9	39,8	40,7	41,6	42,3	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	66,0 70,0 72,0	66,9 70,9 72,9	67,1 71,7 73,7	68,5 72,5 74,5	69,3 73,3 75,3	70,2 74,2 76,2	71,0 75,0 77,0	71,8 75,8 77,8	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	44,9	47,0	49,1	51,2	53,3	55,4	57,5	59,5	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	52,0	54,0	56,0	58,1	60,2	62,2	64,2	66,2	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	58,9 62,9 64,9	59,0 63,0 65,0	59,3 63,3 65,3	59,6 63,6 65,6	59,7 63,7 65,7	60,0 64,0 66,0	60,2 64,2 66,2	60,4 64,4 66,4	(+/-)1,0
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	18,6	19,2	19,8	20,4	21,0	21,6	22,2	22,8	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	9,5	9,7	9,9	10,1	10,4	10,6	10,8	10,9	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	7,3	7,5	7,7	8,0	8,3	8,6	8,9	9,1	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	11,4	11,5	11,6	11,8	11,9	12,0	12,2	12,4	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	12,3	13,0	13,8	14,5	15,3	16,2	17,1	18,0	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана посередине, см	152-158 164-170 176-182	17,5 18,5 18,5	17,5 18,5 18,5	17,5 18,5 18,5	17,5 18,5 18,5	17,5 18,5 18,5	17,5 18,5 18,5	17,5 18,5 18,5	17,5 18,5 18,5	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,4	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В126.2 (БЛУЗА)

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158 164-170 176-182	66,9 70,9 72,9	67,1 71,1 73,1	67,3 71,3 73,3	67,5 71,5 73,5	67,7 71,7 73,7	67,9 71,9 73,9	68,1 72,1 74,1	68,3 72,3 74,3	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,1	43,9	44,7	45,5	46,3	47,0	47,7	48,5	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158 164-170 176-182	72,6 76,6 78,6	73,4 77,4 79,4	74,2 78,2 80,2	75,0 79,0 81,0	75,8 79,8 81,8	76,7 80,7 82,7	77,6 81,6 83,6	78,5 82,5 84,5	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	61,6	63,7	65,8	67,9	70,0	72,1	74,2	76,3	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	68,2	70,2	72,2	74,3	76,4	78,5	80,5	82,5	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	152-158 164-170 176-182	60,5 64,5 66,5	60,7 64,7 66,7	60,8 64,8 66,8	61,0 65,0 67,0	61,1 65,1 67,1	61,3 65,3 67,3	61,4 65,4 67,4	61,5 65,5 67,5	(+/-)1,0
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	23,5	24,3	25,0	25,7	26,4	27,2	28,0	28,8	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	11,1	11,3	11,5	11,6	11,8	12,0	12,1	12,3	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по нижнему краю, см	все роста	9,4	9,7	10,0	10,3	10,6	10,8	11,0	11,2	(+/-)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,6	12,8	13,0	13,3	13,5	13,8	14,5	14,7	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	18,9	19,8	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана посередине, см	152-158	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	(±)0,3
		164-170	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	
		176-182	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	53,4	54,3	55,3	56,3	57,3	58,3	59,3	60,3	(+/-)0,5

Таблица В126.3 (БРЮКИ)

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	98,0	98,2	98,5	98,7	99,0	99,2	99,5	99,7	(±)1,0
		164-170	104,0	104,2	104,5	104,7	105,0	105,2	105,5	105,7	
		176-182	107,0	107,2	107,5	107,7	108,0	108,2	108,5	108,7	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	74,5	74,0	73,5	73,0	72,5	72,0	71,3	70,6	(±)1,0
		164-170	80,5	80,0	79,5	79,0	78,5	78,0	77,3	76,6	
		176-182	83,5	83,0	82,5	82,0	81,5	81,0	80,3	79,6	
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	40,0	42,0	44,2	46,5	48,6	50,7	53,0	55,6	(+/-)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	29,4	30,5	31,7	32,8	34,0	35,1	36,2	37,4	(+/-)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	19,4	19,8	20,2	20,6	21,0	21,4	21,8	22,2	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В126.3 (БРЮКИ)

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	100,0	100,2	100,4	100,6	100,8	101,0	101,2	101,4	(±)1,0
		164-170	106,0	106,2	106,4	106,6	106,8	107,0	107,2	107,4	
		176-182	109,0	109,2	109,4	109,6	109,8	110,0	110,2	110,4	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	69,9	69,2	68,5	67,8	67,1	66,5	66,0	65,5	(±)1,0
		164-170	75,9	75,2	74,5	73,8	73,1	72,5	72,0	71,5	
		176-182	78,9	78,2	77,5	76,8	76,1	75,5	75,0	74,5	
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	57,9	60,1	62,3	64,5	66,7	68,8	70,9	73,0	(+/-)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	38,5	39,6	40,8	41,9	43,0	44,1	45,2	46,3	(+/-)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	22,6	23,0	23,4	23,8	24,3	24,8	25,2	25,6	(+/-)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 421 из 529

B127. Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, женский № 5 в составе:

Описание

Комплект одежды женский для работника скорой помощи состоит из блузы медицинской женской модель: 03-12 и брюк медицинских женских модель: 03-12.

Блуза женская из гладкокрашеной ткани, длиной ниже линии бедер, прямого силуэта, умеренного объема. Перед короче спинки на 3,0 см, в боковых швах разрезы. Горловина V-образной формы обработана на спинке обтачкой, на передо-притачными планками шириной 2,8-3,0 см.

Перед с отрезной кокеткой, в шов притачивания которой входят концы планок горловины; с вертикальными рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с двумя верхними накладными карманами трапециевидной формы, расположенными на 1,0 см ниже шва притачивания кокетки и входящими передними срезами в рельефные швы; с двумя нижними накладными карманами, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы. Верхняя часть нижних карманов шириной 3,4-3,6 см должна быть отрезной и в шве ее притачивания должна быть обработана застежка на тесьму-«молнию».

Спинка с отрезной кокеткой и средним швом.

Рукава втачные одношовные, длиной выше локтя.

По переду и спинке вдоль швов притачивания кокеток может быть настроена светоотражающая лента шириной 2,0-2,5 см.

На левый верхний карман должен быть настроен шеврон «скорая помощь» диаметром 6,7 см; на спинку под кокеткой должен быть настроен прямоугольный шеврон «скорая помощь» размером 29,0*10,0 см.

По рельефам, кокеткам, швам притачивания планок горловины и швам настрачивания карманов должна карманов должна быть проложена двойная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см от края или шва.

По горловине переда и спинки, а также краям разрезов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края.

По низу изделия и низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

Брюки женские из гладкокрашеной ткани, зауженные к низу, умеренного объема, с пятью шлевками для пояса.

Верхний срез брюк должен быть обработан притачным поясом шириной 3,4-3,6 см, состоящим из двух частей-передней и задней. Задняя часть пояса должна заходить за боковые швы на переднюю половину брюк и обрабатывается с вложенной внутрь эластичной тесьмой.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Передняя половина брюк с двумя косыми подрезами, выходящими из шва притачивания пояса и заканчивающимися в боковых шах; с карманами в швах подрезов.

Ниже линии бедер должны быть настроены 2 объемных кармана, большая часть которых располагается на передней половине брюк. Входы в карманы должны закрываться клапанами фигурной формы, пристегивающимися с помощью контактной ленты или притачными планками с тесьмой-«молнией» в шве притачивания планок.

По низу брюк, на расстоянии 20-23 см от края, могут быть настроены 2 ряда светоотражающей тесьмы шириной 2,5 см.

Задняя часть должна быть отстрочена на 5-игольной машине цепного стежка пятью параллельными строчками с расстоянием 0,6-0,7 см.

По линиям входов верхних карманов, по краям клапанов и нижним швам настрачивания накладных карманов должна быть проложена двойная строчка на расстоянии 0,1-0,2 см и 0,7-0,8 см от края или шва.

По швам настрачивания клапанов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,6-0,7 см от шва.

По боковым краям накладных карманов и краям шлевок должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу брюк должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани и цветом светоотражающей тесьмы.

Размеры: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 152-158, 164-170, 176-182.

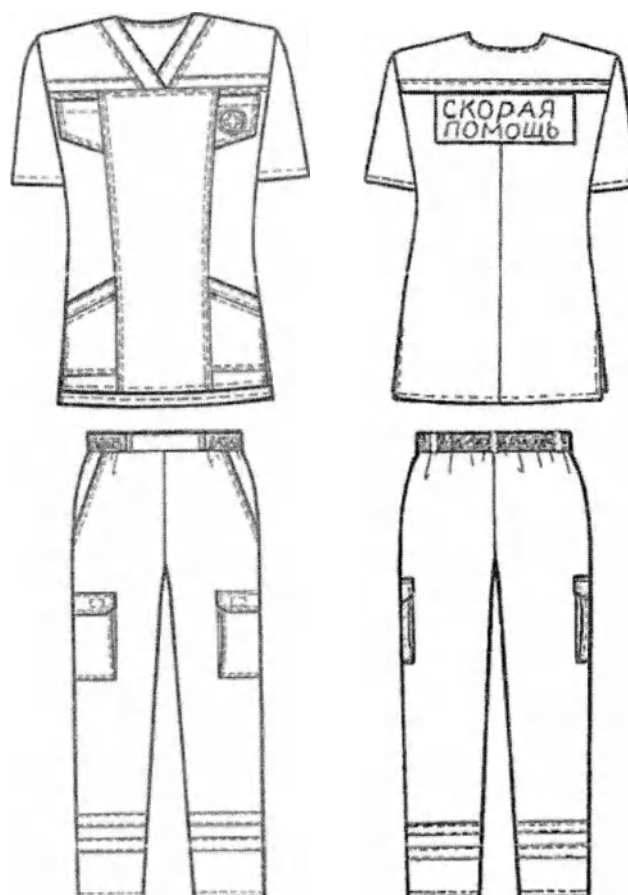


Рисунок В127– Блуза и брюки медицинские женские модель 03-12

Таблица В127.1 Спецификация деталей кроя
Блуза и брюки медицинские женские модель 03-12

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Блуза			
Основная ткань			
1	Центральная часть переда	1	0
2	Бочок переда	2	1
3	Кокетка переда	2	1
4	Спинка	2	1
5	Кокетка спинки	1	0
6	Рукав	2	1
7	Верхний карман	2	1
8	Нижний карман	2	1
9	Планка горловины	2	1
10	Планка кармана	2	1
11	Обтачка горловины спинки	1	0
Итого		19	8

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-
2023, ред.2

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет. кроя	Кол-во зеркально
Брюки			
Основная ткань			
12	Передняя половинка	2	1
13	Задняя половинка	2	1
14	Мешковина кармана	2	1
15	Бочок передней половинки, цельновыкроенный с мешковиной	2	1
16	Пояс	2	1
17	Передняя вставка пояса	1	0
18	Боковой карман	2	1
19	Клапан бокового кармана	4	2
Итого		17	8
Итого по комплекту		36	16

Величины основных измерений и допустимые отклонения от них

Таблица В127.2 (БЛУЗА)

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	68,1	68,2	68,3	68,4	68,8	69,2	69,4	69,6	(+/-1)
		164-170	72,1	72,2	72,3	72,4	72,8	73,2	73,4	73,6	
		176-182	74,1	74,2	74,3	74,4	74,8	75,2	75,4	75,6	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	34,7	35,7	36,7	37,6	38,5	39,4	40,2	41,0	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	68,8	69,5	70,0	70,5	71,2	72,4	73,0	73,8	(+/-1)
		164-170	72,8	73,5	74,0	74,5	75,2	76,4	77,0	77,8	
		176-182	74,8	75,5	76,0	76,5	77,2	78,4	79,0	79,8	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	(+/-1)
6	Длина рукава, см	152-158	21,8	21,9	22,0	22,0	22,2	22,5	22,9	23,0	(+/-0,5)
		164-170	23,8	23,9	24,0	24,0	24,2	24,5	24,9	25,0	
		176-182	24,8	24,9	25,0	25,0	25,2	25,5	25,9	26,0	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	17,2	17,8	18,6	19,5	20,1	20,7	21,3	22,0	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,3	16,9	17,5	18,1	18,7	19,2	19,8	20,4	(+/-0,5)
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	7,1	7,3	7,4	7,5	7,6	7,8	7,9	8,0	(+/-0,3)
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	11,3	11,4	11,5	11,6	11,6	11,7	11,8	11,9	(+/-0,3)
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	15,1	15,8	16,5	17,3	18,2	19,0	19,8	20,5	(+/-0,3)
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	19,0	19,0	19,5	19,5	19,5	19,5	20,0	20,0	(+/-0,3)

Продолжение Таблицы В127.2 (БЛУЗА)

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	152-158	69,8	70,4	71,0	71,4	71,7	72,3	72,7	73,0	(+/-1)
		164-170	73,8	74,4	75,0	75,4	75,7	76,3	76,7	77,0	
		176-182	75,8	76,4	77,0	77,4	77,7	78,3	78,7	79,0	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	41,7	42,4	43,2	43,9	44,7	45,3	45,9	46,7	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	152-158	74,6	75,6	76,6	77,6	78,6	79,7	80,6	82,0	(±/-1)
		164-170	78,6	79,6	80,6	81,6	82,6	83,7	84,6	86,0	
		176-182	80,6	81,6	82,6	83,6	84,6	85,7	86,6	88,0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	62,0	64,0	66,0	68,2	70,4	72,6	74,8	77,0	(±/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	65,5	67,5	69,5	71,7	73,9	76,2	78,5	81,0	(±/-1)
6	Длина рукава, см	152-158	23,1	23,3	23,5	23,8	23,9	24,2	24,7	25,3	(±/-0,5)
		164-170	25,1	25,3	25,5	25,8	25,9	26,2	26,7	27,3	
		176-182	26,1	26,3	26,5	26,8	26,9	27,2	27,7	28,3	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,6	23,3	24,0	24,8	25,7	26,6	27,6	28,6	(±/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	21,1	21,8	22,6	23,4	24,3	25,1	26,1	27,1	(±/-0,5)
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	8,2	8,3	8,5	8,6	8,7	8,9	9,1	9,3	(±/-0,3)
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,0	12,0	12,1	12,2	12,2	12,3	12,4	12,5	(±/-0,3)
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	21,5	22,3	23,0	21,4	21,5	21,6	21,7	21,8	(±/-0,3)
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	20,0	20,0	20,5	20,5	20,5	21,0	21,0	21,0	(±/-0,3)

Таблица В127.3 (БРЮКИ)

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			40	42	44	46	48	50	52	54	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	99,0	99,2	99,5	99,7	100,0	100,2	100,5	100,7	(±/-)1,0
		164-170	105,0	105,2	105,5	105,7	106,0	106,2	106,5	106,7	
		176-182	108,0	108,2	108,5	108,7	109,0	109,2	109,5	109,7	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	76,0	75,5	75,0	74,5	74,0	73,5	72,8	72,1	(±/-)1,0
		164-170	82,0	81,5	81,0	80,5	80,0	79,5	78,8	78,1	
		176-182	85,0	84,5	84,0	83,5	83,0	82,5	81,8	81,1	
3	Ширина на уровне талии, см	все роста	41,5	43,5	45,7	48,0	50,1	52,2	54,5	57,1	(±/-)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	28,9	30,0	31,2	32,3	33,5	34,6	35,7	36,9	(±/-)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	18,8	19,2	19,6	20,0	20,4	20,8	21,2	21,6	(±/-)0,5

Продолжение Таблицы В127.3 (БРЮКИ)

№	Наименование измерения	Рост	Размер								Допуск, см
			56	58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	152-158	101,0	101,2	101,4	101,6	101,8	102,0	102,2	102,4	(±/-)1,0
		164-170	107,0	107,2	107,4	107,6	107,8	108,0	108,2	108,4	
		176-182	110,0	110,2	110,4	110,6	110,8	111,0	111,2	111,4	
2	Длина по шаговому шву, см	152-158	71,4	70,7	70,0	69,3	68,6	68,0	67,5	67,0	(±/-)1,0
		164-170	77,4	76,7	76,0	75,3	74,6	74,0	73,5	73,0	
		176-182	80,4	79,7	79,0	78,3	77,6	77,0	76,5	76,0	
3	Ширина на уровне талии, см	все роста	59,4	61,6	63,8	66,0	68,2	70,3	72,4	74,5	(±/-)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	38,0	39,1	40,3	41,4	42,5	43,6	44,7	45,8	(±/-)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	22,0	22,4	22,8	23,2	23,7	24,2	24,6	25,0	(±/-)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

B128. Халат медицинский мужской модель 201-1.

Описание модели

Халат мужской медицинский длиной выше колена, прямого силуэта, свободного покроя.

Перед с отложными лацканами до линии груди, с центральной бортовой застежкой на 4 обметанные петли и 4 пуговицы; с одним верхним накладным карманом с фигурным передним краем; с двумя нижними накладными карманами с фигурными передними краями, которые входят задними боковыми срезами в боковые швы.

Спинка с притачной кокеткой, со средним швом, заканчивающимся шлицей, с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скрепленными посередине спинки с помощью пуговицы. Рукава втачные, одношовные, длинные. Воротник отложной, «пиджачного» типа.

На верхнем накладном кармане должна быть проложена вертикальная сквозная строчка от верха до низа кармана на расстоянии 3,7-3,8 см от переднего края кармана.

По краям бортов, кокетке, горловине переда, воротнику, полупоясам и швам настрачивания карманов должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см от края или шва.

По шву втачивания воротника в горловину спинки должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от шва.

По верхним краям карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,1-2,2 см от края.

По низу изделия и низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы пластиковые пуговицы диаметром 2,0-2,2 см.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

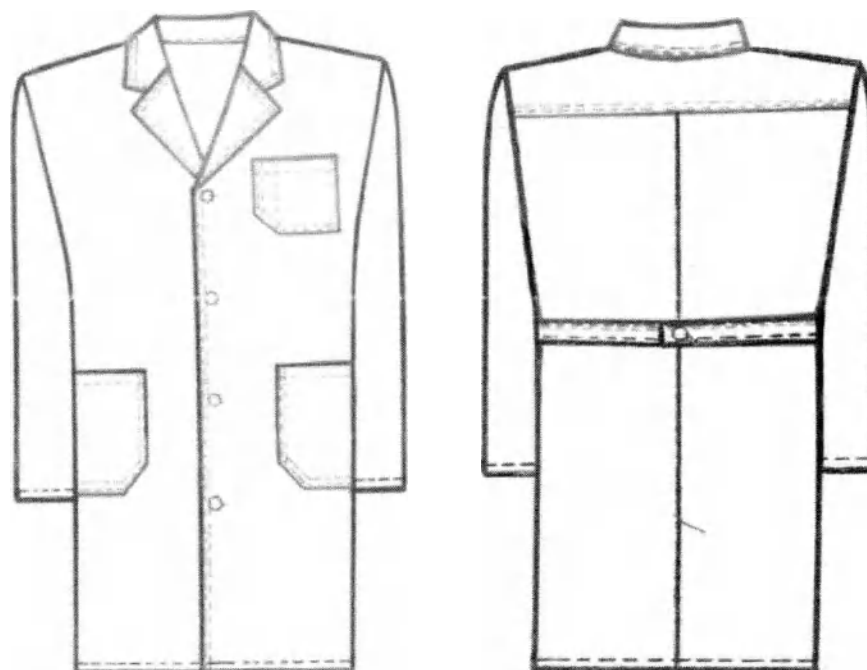


Рисунок В128– Халат медицинский мужской модель 201-1

Таблица В128.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский мужской модель 201-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Спинка	2	1
3	Кокетка спинки	1	0
4	Рукав	2	1
5	Верхний карман	1	0
6	Нижний карман	2	1
7	Воротник	2	1
8	Полупояс	2	1
9	Подборт	2	1
Итого		16	7

Таблица В128.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Халат медицинский мужской модель 201-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	93,6	93,8	94,1	94,4	94,6	94,8	95,0	(+/-)1,0
		170-176	99,6	99,8	100,1	100,4	100,6	100,8	101,0	
		182-188	105,6	105,8	106,1	106,4	106,6	106,8	107,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	45,0	45,8	46,6	47,4	48,2	49,0	49,8	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164	94,3	94,9	95,6	96,3	96,9	97,5	98,2	(+/-)1,0
		170-176	100,3	100,9	101,6	102,3	102,9	103,5	104,2	
		182-188	106,3	106,9	107,6	108,3	108,9	109,5	110,2	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164	60,1	60,1	60,2	60,2	60,3	60,3	60,4	(±)1,0
		170-176	64,1	64,1	64,2	64,2	64,3	64,3	64,4	
		182-188	68,1	68,1	68,2	68,2	68,3	68,3	68,4	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	19,8	20,4	21,0	21,6	22,2	22,9	23,5	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	14,4	14,6	14,8	15,0	15,2	15,4	15,6	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	13,0	13,4	13,4	13,8	13,8	13,8	14,4	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,5	12,8	12,8	13,4	13,4	13,4	13,7	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	17,5	18,1	19,0	19,0	19,3	19,3	20,1	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана посередине, см	все роста	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,6	(+/-)0,3
13	Длина воротника отлёту, см	все роста	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В128.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	95,3	95,5	95,7	96,0	96,2	96,4	96,6	(±)1,0
		170-176	101,3	101,5	101,7	102,0	102,2	102,4	102,6	
		182-188	107,3	107,5	107,7	108,0	108,2	108,4	108,6	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	50,6	51,4	52,2	53,0	53,8	54,6	55,4	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164	98,8	99,4	100,0	100,6	101,3	102,0	102,8	(±)1,0
		170-176	104,8	105,4	106,0	106,6	107,3	108,0	108,8	
		182-188	110,8	111,4	112,0	112,6	113,3	114,0	114,8	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	81,0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164	60,5	60,6	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7	(±)1,0
		170-176	64,5	64,6	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	
		182-188	68,5	68,6	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	24,2	25	25,8	26,5	27,2	27,8	28,5	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,8	16,0	16,3	16,6	17	17,3	17,7	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	14,4	14,4	14,8	14,8	14,8	15,2	15,2	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	13,7	13,7	13,8	13,8	13,8	14,0	14,0	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	20,1	20,8	20,8	20,8	21,4	22,2	22,2	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана посередине, см	все роста	20,6	20,8	20,8	20,8	20,9	21,0	21,0	(+/-)0,3
13	Длина воротника отлёту, см	все роста	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	(+/-)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В129. Халат медицинский мужской модель 202-1.

Описание модели

Халат мужской медицинский длиной выше колена, прямого силуэта, свободного покроя.

Перед с центральной бортовой застежкой на 6 обметанных петель и 6 пуговиц; с притачными кокетками; с одним верхним накладным карманом фигурной формы на левой стороне, с настроенным на него дополнительным карманом, передним и нижним срезами входящим в подгибку основного кармана; с двумя нижними накладными карманами фигурной формы, задние срезы которых входят в боковые швы; с настроенным на правый нижний карман дополнительным карманом, передним и нижним срезами входящим в подгибку основного кармана.

Спинка с притачной кокеткой, со средним швом и двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скрепленными посередине спинки с помощью пуговицы. Рукава втачные, одношовные, длинные.

Воротник-стойка.

По краям бортов, воротнику, кокеткам, горловине переда и швам настрачивания карманов должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см. от края или шва.

По швам застрачивания полупоясов, настрачивания дополнительных карманов и шву втачивания воротника в горловину спинки должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см. от шва.

По верхним краям нижних карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,8-3,0 см. от края.

По линиям входа верхнего и двух дополнительных карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,6-0,7 см. от края.

По низу рукавов и низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см. от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы пластиковые пуговицы диаметром 1,9-2,1 см.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

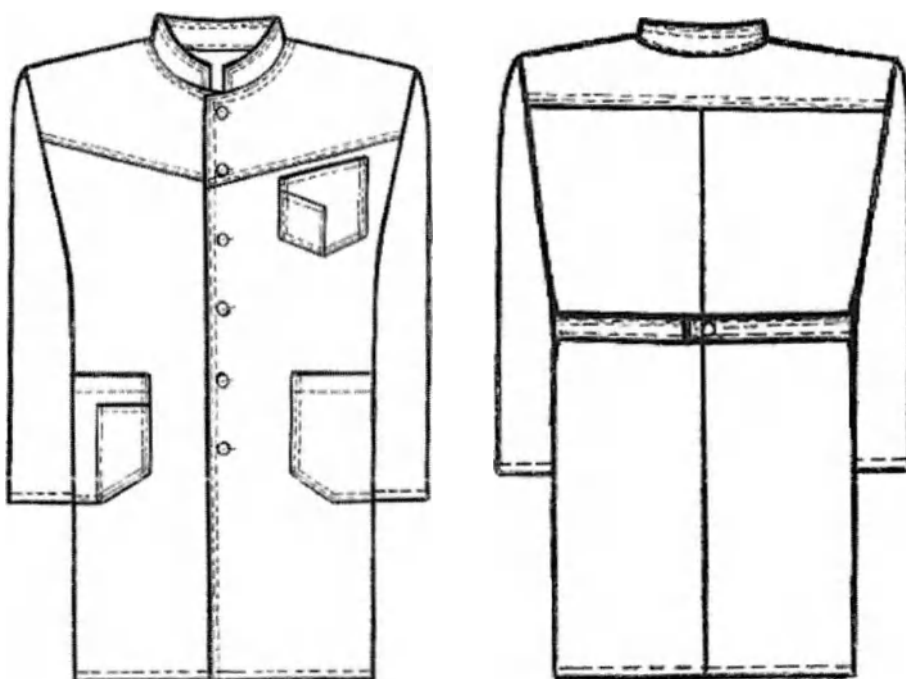


Рисунок В129– Халат медицинский мужской модель 202-1

Таблица В129.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский мужской модель 202-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Спинка	2	1
3	Кокетка полочки	2	1
4	Кокетка спинки	1	0
5	Рукав	2	1
6	Верхний карман основной	1	0
7	Верхний карман дополнительный	1	0
8	Нижний карман основной	2	1
9	Нижний карман дополнительный	1	0
10	Воротник	2	1
11	Полупояс	2	1
12	Подборт	2	1
Итого		20	8

Таблица В129.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Халат медицинский мужской модель 202-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	94,0	94,2	94,5	94,8	95,0	95,2	95,5	(±)1,0
		170-176	100,0	100,2	100,5	100,8	101,0	101,2	101,5	
		182-188	106,0	106,2	106,5	106,8	107,0	107,2	107,5	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	46,0	46,8	47,6	48,4	49,2	50,0	50,8	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164 170-176 182-188	94,0 100,0 106,0	94,6 100,6 106,6	95,3 101,3 107,3	96,0 102,0 108,0	96,6 102,6 108,6	97,2 103,2 109,2	97,9 103,9 109,9	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164 170-176 182-188	61,9 63,9 67,9	61,9 63,9 67,9	62,0 64,0 68,0	62,0 64,0 68,0	62,1 64,1 68,1	62,1 64,1 68,1	62,2 64,2 68,2	(+/-)1,0
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	19,8	20,4	21,0	21,6	22,2	22,9	23,5	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	14,6	14,8	15,0	15,2	15,4	15,6	15,8	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	12,8	12,8	12,8	12,8	13,8	13,8	13,8	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	все роста	14,9	14,9	14,9	14,9	15,3	15,3	15,3	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	16,6	16,6	17,6	17,6	18,5	18,5	18,5	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	19,8	19,8	20,3	20,3	20,6	20,6	20,6	(+/-)0,3

Продолжение Таблицы В129.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	158-164 170-176 182-188	95,8 101,8 107,8	96,0 102,0 108,0	96,2 102,2 108,2	96,5 102,5 108,5	96,7 102,7 108,7	96,9 102,9 108,9	97,1 103,1 109,1	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	51,6	52,4	53,2	54,0	54,8	55,6	56,4	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164 170-176 182-188	98,5 104,5 110,5	99,1 105,1 111,1	99,7 105,7 111,7	100,3 106,3 112,3	101,0 107,0 113,0	101,7 107,7 113,7	102,5 108,5 114,5	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164 170-176 182-188	62,3 64,3 68,3	62,4 64,4 68,4	62,4 64,4 68,4	62,5 64,5 68,5	62,5 64,5 68,5	62,5 64,5 68,5	62,5 64,5 68,5	(+/-)1,0
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	24,2	25	25,8	26,5	27,2	27,8	28,5	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,0	16,2	16,5	16,8	17,0	17,3	17,6	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	13,8	14,8	14,8	14,8	14,8	15,7	15,7	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	все роста	15,3	16,0	16,0	16,0	16,0	16,7	16,7	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	19,5	19,5	19,5	20,5	20,5	21,8	21,8	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	21,7	21,7	21,7	22,0	22,0	22,3	22,3	(+/-)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В130. Халат медицинский мужской модель 203-1.

Описание модели

Халат мужской медицинский длиной выше колена, прямого силуэта, свободного покроя; с двумя разрезами в боковых швах по низу изделия и с двумя дополнительными разрезами длиной 16-16,5см, ниже линии талии на 7,0см.

Перед с центральной бортовой застежкой на 6 или 7 кнопок; с одним верхним накладным карманом фигурной формы с фигурным клапаном, пришитым над карманом и пристегивающимся к нему на кнопку; с двумя нижними накладными карманами фигурной формы, входящими задними боковыми срезами в боковые швы, с фигурными клапанами, пришитыми над карманами и пристегивающимися к ним на кнопки.

Спинка с притачной кокеткой; средним швом; декоративной патой шириной 4,2-4,3см, вшитой одним концом в шов притачивания кокетки на среднем швом, а другим концом треугольной формы пристегивающейся к спинке на кнопку; с двумя декоративными патами шириной 4,2-4,3см, вшитыми одним концом в боковые швы над нижними боковыми разрезами, а другим концом треугольной формы пристегивающимися к спинке на кнопку; с двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне талии и скрепленными посередине спинки с помощью кнопки. Для регулировки степени прилегания по талии на левом полупоясе должны быть установлены две нижних части кнопки с расстоянием 2,5см.

Рукава втачные, одношовные, длинные.

Воротник – стойка, застегивающаяся на одну кнопку.

По краям бортов, кокетке, воротнику, полупоясам, патам, горловине переда, краям клапанов и швам настрачивания клапанов и карманов должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см от края или шва.

По разрезам и шву втачивания воротника в горловину спинки должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

По низу рукавов и низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,1-1,3 см.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

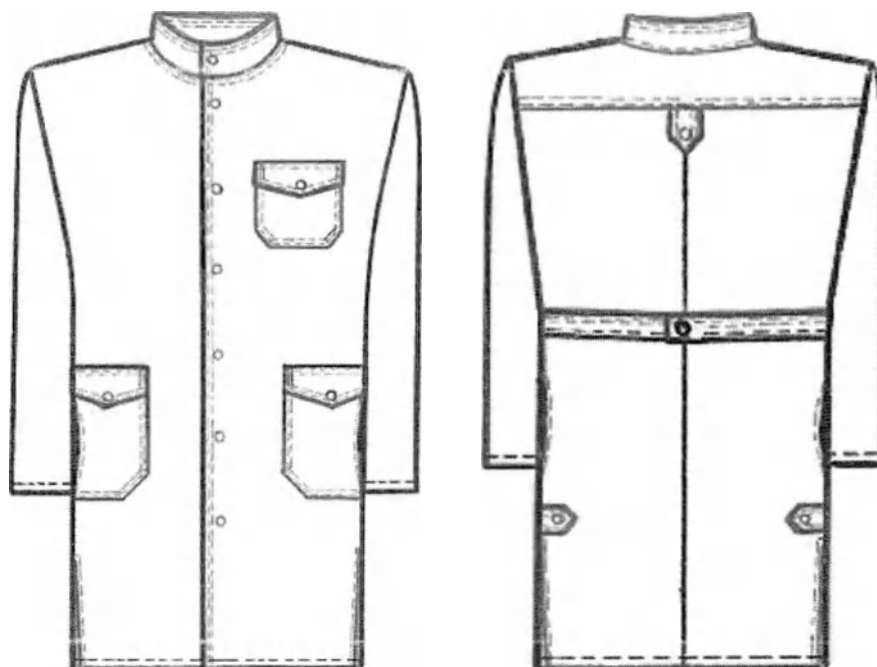


Рисунок В130–Халат медицинский мужской модель 203-1

Таблица В130.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский мужской модель 203-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Спинка	2	1
3	Кокетка спинки	1	0
4	Верхний карман	1	0
5	Нижний карман	2	1
6	Клапан верхнего кармана	2	1
7	Клапан нижнего кармана	4	2
8	Рукав	2	1
9	Воротник	2	1
10	Полупояс	2	1
11	Пата	6	3
12	Подборт	2	1
Итого		28	13

Таблица В130.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Халат медицинский мужской модель 203-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	95,6	95,8	96,1	96,4	96,6	96,8	97,0	(+/-)1,0
		170-176	101,6	101,8	102,1	102,4	102,6	102,8	103,0	
		182-188	107,6	107,8	108,1	108,4	108,6	108,8	109,0	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	45,0	45,8	46,6	47,4	48,2	49,0	49,8	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164	96,3	96,9	97,6	98,3	98,9	99,5	100,2	(±)1,0
		170-176	102,3	102,9	103,6	104,3	104,9	105,5	106,2	
		182-188	108,3	108,9	109,6	110,3	110,9	111,5	112,2	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164	60,1	60,1	60,2	60,2	60,3	60,3	60,4	(±)1,0
		170-176	64,1	64,1	64,2	64,2	64,3	64,3	64,4	
		182-188	68,1	68,1	68,2	68,2	68,3	68,3	68,4	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	19,8	20,4	21,0	21,6	22,2	22,9	23,5	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	14,4	14,6	14,8	15,0	15,2	15,4	15,6	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	13,0	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана, см	все роста	14,0	14,0	14	14	14,5	14,5	14,5	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	17,2	17,2	17,2	17,2	18,2	18,2	19,2	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,5	(+/-)0,3
13	Длина воротника отлёту, см	все роста	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В130.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	97,3	97,5	97,7	98,0	98,2	98,4	98,6	(±)1,0
		170-176	103,3	103,5	103,7	104,0	104,2	104,4	104,6	
		182-188	109,3	109,5	109,7	110,0	110,2	110,4	110,6	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	50,6	51,4	52,2	53,0	53,8	54,6	55,4	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164	100,8	101,4	102,0	102,6	103,3	104,0	104,8	(±)1,0
		170-176	106,8	107,4	108,0	108,6	109,3	110,0	110,8	
		182-188	112,8	113,4	114,0	114,6	115,3	116,0	116,8	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164	60,5	60,6	60,6	60,7	60,7	60,7	60,7	(±)1,0
		170-176	64,5	64,6	64,6	64,7	64,7	64,7	64,7	
		182-188	68,5	68,6	68,6	68,7	68,7	68,7	68,7	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	24,2	25	25,8	26,5	27,2	27,8	28,5	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,8	16,0	16,3	16,6	17	17,3	17,7	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	15,0	15,0	15,0	15,5	15,5	15,5	15,5	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана, см	все роста	14,8	14,8	14,8	15,1	15,1	15,1	15,1	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	19,2	20,0	20,0	21,0	21,0	21,0	22,0	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	19,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,5	(+/-)0,3
13	Длина воротника отлёту, см	все роста	52,0	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	(+/-)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 435 из 529

В131. Халат медицинский мужской модель 204-1.

Описание модели

Халат мужской медицинский длиной выше колена, прямого силуэта, свободного покроя.

Перед с центральной бортовой застежкой на 5 обметанных петель и 5 пуговиц; с притачными кокетками; с одним верхним накладным карманом фигурной формы на левой стороне, с настроенным на него дополнительным карманом, передним и нижним срезами входящим в подгибку основного кармана; с двумя нижними накладными карманами фигурной формы, задние срезы которых входят в боковые швы; с настроенным на правый нижний карман дополнительным карманом, передним и нижним срезами входящим в подгибку основного кармана.

Спинка с притачной кокеткой, со средним швом и двумя полупоясами, вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скрепленными посередине спинки с помощью пуговицы. Рукава втачные, одношовные, длинные.

Воротник-отложной, пиджачного типа.

По краям бортов, воротнику, кокеткам, горловине переда и швам настрачивания карманов должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см. от края или шва.

По швам застрачивания полупоясов, настрачивания дополнительных карманов и шву втачивания воротника в горловину спинки должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см. от шва.

По верхним краям нижних карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,8-3,0 см. от края.

По линиям входа верхнего и двух дополнительных карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,6-0,7 см. от края.

По низу рукавов и низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см. от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы пластиковые пуговицы диаметром 1,7-1,9 см.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 436 из 529

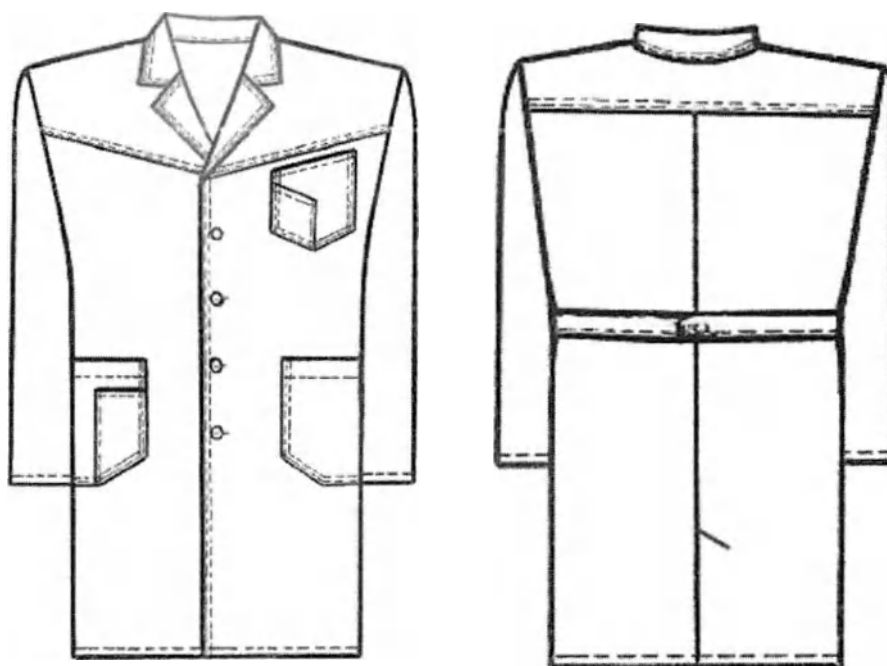


Рисунок В131–Халат медицинский мужской модель 204-1

Таблица В131.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский мужской модель 204-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Спинка	2	1
3	Кокетка полочки	2	1
4	Кокетка спинки	1	0
5	Рукав	2	1
6	Верхний карман основной	1	0
7	Верхний карман дополнительный	1	0
8	Нижний карман основной	2	1
9	Нижний карман дополнительный	1	0
10	Воротник	2	1
11	Полупояс	2	1
12	Подборт	2	1
Итого		20	8

Таблица В131.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Халат медицинский мужской модель 204-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	91.0	91.2	91.5	91.8	92.0	92.2	92.5	(+/-)1.0
		170-176	97.0	97.2	97.5	97.8	98.0	98.2	98.5	
		182-188	103.0	103.2	103.5	103.8	104.0	104.2	104.5	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	45,2	46,0	46,8	47,6	48,4	49,2	50,0	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164 170-176 182-188	91,0 97,0 103,0	91,6 97,6 103,6	92,3 98,3 104,3	93,0 99,0 105,0	93,6 99,6 105,6	94,2 100,2 106,2	94,9 100,9 106,9	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164 170-176 182-188	61,9 63,9 67,9	61,9 63,9 67,9	62,0 64,0 68,0	62,0 64,0 68,0	62,1 64,1 68,1	62,1 64,1 68,1	62,2 64,2 68,2	(+/-)1,0
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	19,8	20,4	21,0	21,6	22,2	22,9	23,5	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	14,6	14,8	15,0	15,2	15,4	15,6	15,8	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	12,8	12,8	12,8	12,8	13,8	13,8	13,8	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	все роста	14,9	14,9	14,9	14,9	15,3	15,3	15,3	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	16,6	16,6	17,6	17,6	18,5	18,5	18,5	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	19,8	19,8	20,3	20,3	20,6	20,6	20,6	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлёту, см	все роста	41,8	42,5	43,2	43,9	44,5	45,3	46,0	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В131.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	158-164 170-176 182-188	92,8 98,8 104,8	93,0 99,0 105,0	93,2 99,2 105,2	93,5 99,5 105,5	93,7 99,7 105,7	93,9 99,9 105,9	94,1 100,1 106,1	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	50,8	51,6	52,4	53,2	54,0	54,8	55,6	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164 170-176 182-188	95,5 101,5 107,5	96,1 102,1 108,1	96,7 102,7 108,7	97,3 103,3 109,3	98,0 104,0 110,0	98,7 104,7 110,7	99,5 105,5 111,5	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	81,0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164 170-176 182-188	62,3 64,3 68,3	62,4 64,4 68,4	62,4 64,4 68,4	62,5 64,5 68,5	62,5 64,5 68,5	62,5 64,5 68,5	62,5 64,5 68,5	(+/-)1,0
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	24,2	25	25,8	26,5	27,2	27,8	28,5	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,0	16,2	16,5	16,8	17,0	17,3	17,6	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	13,8	14,8	14,8	14,8	14,8	15,7	15,7	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	все роста	15,3	16,0	16,0	16,0	16,0	16,7	16,7	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	19,5	19,5	19,5	20,5	20,5	21,8	21,8	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	21,7	21,7	21,7	22,0	22,0	22,3	22,3	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлёту, см	все роста	46,7	47,4	48,1	48,8	49,5	50,2	50,9	(+/-)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В132. Халат медицинский мужской модель 205-1.

Описание модели

Халат медицинский мужской из белой или гладкокрашеной ткани, длиной выше колен, прямого силуэта, свободного покроя, со смещенными вперед на 3,0 см плечевыми швами, с двумя разрезами длиной 16,2-16,6 см в боковых швах ниже линии талии.

Перед с центральной бортовой супатной застежкой на 6 кнопок; с одним верхним накладным карманом фигурной формы; с двумя нижними накладными карманами фигурной формы, входящими задними срезами в боковые швы.

Спинка с притачной кокеткой; двумя рельефными швами, выходящими из шва притачивания кокетки и заканчивающимися двумя шлицами внизу; с двумя полупоясами шириной 3,7-3,9 см вшитыми одним концом в боковые швы на уровне линии талии и скрепленными посередине спинки с помощью кнопки. Для регулировки степени прилегания по талии на левом полупоясе должны быть установлены две нижние части кнопок с расстоянием 2,5 см.

Рукава втачные, одношовные, длинные.

Воротник-стойка шириной 3,3-3,5 см, застегивающаяся на одну кнопку.

Нижний воротник и подборта должны быть выполнены из отделочной ткани.

Вдоль края борта левой полочки от шва втачивания воротника до низа изделия должна быть проложена сквозная строчка на расстоянии 4,0-4,2 см от края.

На верхнем накладном кармане должна быть проложена сквозная строчка от верха до низа кармана на расстоянии 3,5-3,7 см от его переднего края.

По верхним краям карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,3-2,5 см от края. На подгибке верхнего кармана может закреплен логотип с фирменной символикой.

По краям бортов, воротника, полупоясов, разрезов, плечевым швам, швам притачивания кокетки и настрачиванию карманов должны быть проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу рукавов и низу изделия должны быть проложены строчки на расстоянии 1,14-1,6 см от края.

По краям разрезов в боковых швах должны быть установленные на спецмашине закрепки.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,0-1,2 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом основной и отделочной тканей.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 439 из 529

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

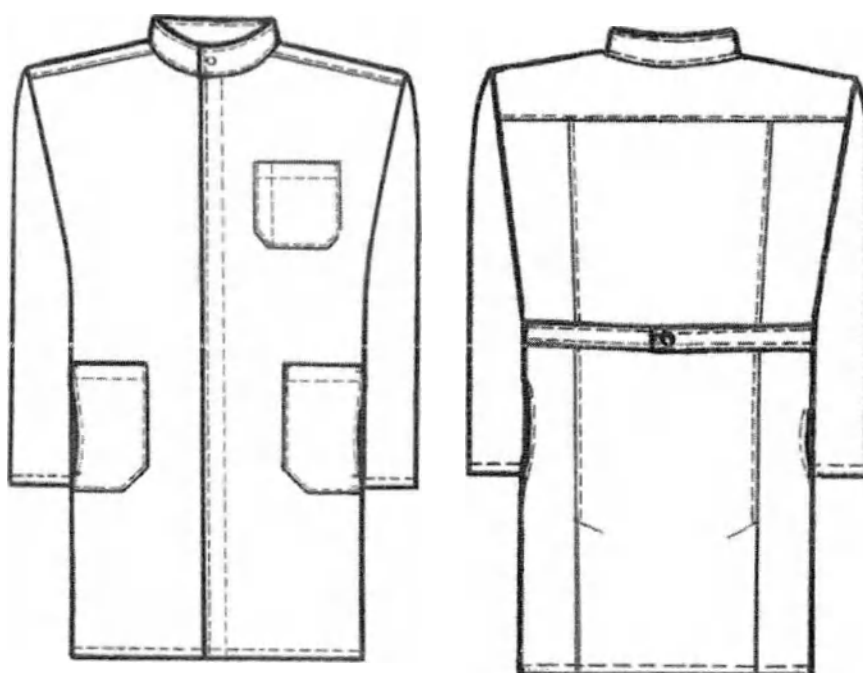


Рисунок В132–Халат медицинский мужской модель 205-1

Таблица В132.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский мужской модель 205-1

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Спинка	1	0
3	Бочок спинки	2	1
4	Кокетка	1	0
5	Рукав	2	1
6	Верхний карман	1	0
7	Нижний карман	2	1
8	Верхний воротник	1	0
9	Полупояс	2	1
Отделочная ткань			
10	Нижний воротник	1	0
11	Подборт	2	1
	Итого	17	6

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 440 из 529

Таблица В132.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Халат медицинский мужской модель 205-1

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	93,1	93,3	93,6	93,9	94,1	94,3	94,5	(±)1,0
		170-176	99,1	99,3	99,6	99,9	100,1	100,3	100,5	
		182-188	105,1	105,3	105,6	105,9	106,1	106,3	106,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	45,2	46,0	46,8	47,6	48,4	49,2	50,0	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164	92,5	93,2	94,0	94,8	95,5	96,1	96,7	(±)1,0
		170-176	98,5	99,2	100,0	100,8	101,5	102,1	102,7	
		182-188	104,5	105,2	106,0	106,8	107,5	108,1	108,7	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	158-164	59,4	59,5	59,6	59,7	59,8	59,9	60,0	(±)1,0
		170-176	63,4	63,5	63,6	63,7	63,8	63,9	64,0	
		182-188	67,4	67,5	67,6	67,7	67,8	67,9	68,0	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,2	20,8	21,5	22,1	22,7	23,4	24,0	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	14,6	14,8	15,0	15,2	15,4	15,6	15,8	(±)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	12,5	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0	(±)0,3
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	все роста	13,7	14,1	14,1	14,1	14,5	14,5	14,5	(±)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	17,5	18,2	18,2	18,2	20,0	20,0	20,0	(±)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	19,7	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	(±)0,3
13	Длина воротника по отлёту, см	все роста	46,8	47,7	48,5	49,3	50,2	51,1	52,1	(±)0,5

Продолжение Таблицы В132.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	94,7	95,0	95,2	95,5	95,7	95,9	96,1	(±)1,0
		170-176	100,7	101,0	101,2	101,5	101,7	101,9	102,1	
		182-188	106,7	107,0	107,2	107,5	107,7	107,9	108,1	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	50,8	51,6	52,4	53,2	54,0	54,8	55,6	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164	97,4	98,0	98,6	99,2	99,8	100,5	101,3	(±)1,0
		170-176	103,4	104,0	104,6	105,2	105,8	106,5	107,3	
		182-188	109,4	110,0	110,6	111,2	111,8	112,5	113,3	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,05	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	158-164	60,0	60,1	60,1	60,2	60,2	60,3	60,4	(±)1,0
		170-176	64,0	64,1	64,1	64,2	64,2	64,3	64,4	
		182-188	68,0	68,1	68,1	68,2	68,2	68,3	68,4	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	24,7	25,5	26,3	27,0	27,7	28,3	29,0	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,0	16,2	16,5	16,8	17,2	17,5	17,9	(±)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	15,0	15,0	15,0	15,5	15,5	15,5	15,5	(±)0,3
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	все роста	15,0	15,0	15,0	15,1	15,1	15,1	15,1	(±)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	21,2	21,2	21,2	22,7	22,7	22,7	22,7	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	20,8	20,8	20,8	22,0	22,0	22,0	22,0	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлёту, см	все роста	53,0	53,9	54,8	55,6	56,5	57,4	58,3	(+/-)0,5

В133. Халат медицинский мужской модель 206.

Описание модели

Халат медицинский мужской из белой или гладкокрашеной эластичной ткани, прямого силуэта, умеренного объема, со смещенными вперед на 3,0 см плечевыми швами.

Перед с центральной бортовой застежкой на 6 кнопок (края бортов должны быть обработаны планками шириной 3,7-3,9 см); с притачными кокетками выше линии груди; с двумя вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокеток и доходящими до низа. Швы притачивания кокеток наклонные, в них должны быть обработаны 2 кармана. В рельефах должны быть обработаны 2 боковых кармана. Мешковины верхних и нижних карманов должны быть настроены на полочки по контуру сквозными строчками. По краям входов в карманы должны быть закрепки, установленные на спецмашине: на верхних карманах 2 закрепки возле пройм-контрастного цвета, остальные-белые.

Спинка с отрезной кокеткой и средним швом, заканчивающимся плищцей.

Рукава втачные, одношовные, длинные.

Воротник-стойка шириной 3,4-3,6 см.

По кокеткам, рельефам, плечевым швам, краям воротника и планок, а также шву втачивания воротника в горловину должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу изделия и низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,0-1,2 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани, а также нитки контрастного цвета для выполнения закрепок.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 442 из 529



Рисунок В133–Халат медицинский мужской модель 206

Таблица В133.1 Спецификация деталей кроя Халат медицинский мужской модель 206

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	2	1
4	Кокетка спинки	1	0
5	Кокетка полочки	2	1
6	Планка	2	1
7	Рукав	2	1
8	Подборт	2	1
9	Воротник	2	1
10	Мешковина верхнего кармана	4	2
11	Мешковина нижнего кармана	4	2
	Прокладочный материал		
12	Воротник	1	0
	Итого	26	12

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Таблица В133.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Халат медицинский мужской модель 206

№	Наименование измерения	Рост	Размер					Допуск, см
			44	46	48	50	52	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	84,4	84,6	84,9	85,2	85,4	(±)1,0
		170-176	90,4	90,6	90,9	91,2	91,4	
		182-188	96,4	96,6	96,9	97,2	97,4	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,8	44,8	45,8	46,8	47,8	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164	83,2	83,9	84,7	85,5	86,2	(±)1,0
		170-176	89,2	89,9	90,7	91,5	92,2	
		182-188	95,2	95,9	96,7	97,5	98,2	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	50,3	52,4	54,5	56,6	58,7	(±)1,0
6	Длина рукава, см	158-164	59,4	59,5	59,6	59,7	59,8	(±)1,0
		170-176	64,3	63,5	63,6	63,7	63,8	
		182-188	67,4	67,5	67,6	67,7	67,8	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	19,6	20,2	20,8	21,5	22,1	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	14,4	14,6	14,8	15,0	15,2	(±)0,5
9	Длина входа верхнего кармана, см	все роста	11,5	12,0	12,0	12,5	12,5	(±)0,3
10	Длина входа нижнего кармана, см	все роста	15,2	15,2	15,2	15,2	15,7	(±)0,3
11	Длина воротника по отлёту, см	все роста	40,8	41,8	42,7	43,5	44,3	(±)0,5

Продолжение Таблицы В133.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер					Допуск, см
			54	56	58	60	62	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	85,6	85,8	86,0	86,3	86,5	(±)1,0
		170-176	91,6	91,8	92,0	92,3	92,5	
		182-188	97,6	97,8	98,0	98,3	98,5	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	48,7	49,6	50,5	51,4	52,3	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164	86,8	87,4	88,1	88,7	89,3	(±)1,0
		170-176	92,8	93,4	94,1	94,7	95,3	
		182-188	98,8	99,4	100,1	100,7	101,3	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	60,8	62,9	65,0	67,1	69,2	(±)1,0
6	Длина рукава, см	158-164	59,9	60,0	60,0	60,1	60,1	(±)1,0
		170-176	63,9	64,0	64,0	64,1	64,1	
		182-188	67,9	68,0	68,0	68,1	68,1	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	22,7	23,4	24,0	24,7	25,5	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	15,4	15,6	15,8	16,0	16,2	(±)0,5
9	Длина входа верхнего кармана, см	все роста	12,5	12,5	12,5	13,0	13,0	(±)0,3
10	Длина входа нижнего кармана, см	все роста	15,7	16,2	16,2	16,7	16,7	(±)0,3
11	Длина воротника по отлёту, см	все роста	45,2	46,1	47,5	48,5	49,5	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В134. Куртка медицинская мужская модель 401К

Описание модели

Куртка медицинская мужская длиной ниже линии бедер, прямого силуэта, свободного покроя.

Перед с центральной бортовой застежкой на 4 кнопки; с притачными кокетками; с одним верхним накладным карманом фигурной формы на левой стороне, с настроенным на него дополнительным карманом, передним и нижним срезами входящим в подгибку основного кармана; с двумя нижними накладными карманами фигурной формы, задние срезы которых входят в боковые швы; с настроенным на правый нижний карман дополнительным карманом, передним и нижним срезами входящим в подгибку основного кармана.

Спинка с притачной кокеткой и средним швом.

Рукава втачные, одношовные, длинные.

Воротник – стойка, застегивающаяся на одну кнопку.

Нижний воротник и подборта могут быть выполнены из отделочной набивной ткани.

По краям бортов, воротнику, кокеткам, горловине переда и швам настрачивания карманов должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см от края или шва.

По швам настрачивания дополнительных карманов и шву втачивания воротника в горловину спинки должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от шва.

По верхним краям нижних карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,8-3,0 см от края.

По линиям входа верхнего и двух дополнительных карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,6-0,7 см от края.

По низу рукавов и низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,3-1,5 см.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

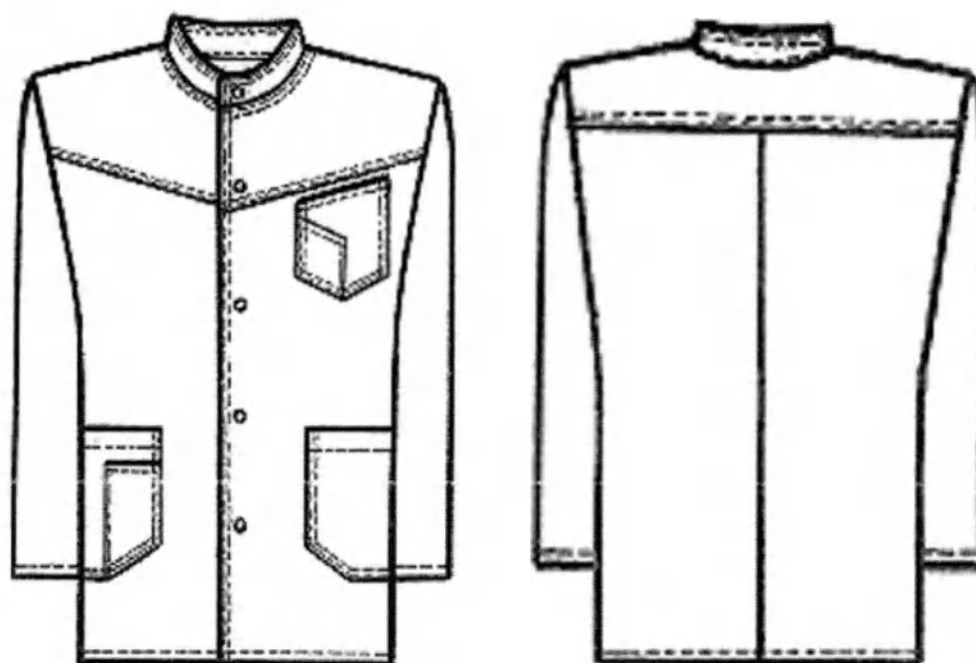


Рисунок В134–Куртка медицинская мужская модель 401К

Таблица В134.1 Спецификация деталей кроя Куртка медицинская мужская модель 401К

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Спинка	2	1
3	Кокетка полочки	2	1
4	Кокетка спинки	1	0
5	Рукав	2	1
6	Верхний карман основной	1	0
7	Верхний карман дополнительный	1	0
8	Нижний карман основной	2	1
9	Нижний карман дополнительный	1	0
10	Верхний воротник	1	0
Отделочная ткань			
11	Нижний воротник	1	0
12	Подборт	2	1
Итого		18	6

Таблица В134.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Куртка медицинская мужская 401К

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	73,0	73,2	73,5	73,8	74,0	74,2	74,5	(±)1,0
		170-176	78,0	78,2	78,5	78,8	79,0	79,2	79,5	
		182-188	83,0	83,2	83,5	83,8	84,0	84,2	84,5	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	46,0	46,8	47,6	48,4	49,2	50,0	50,8	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164 170-176 182-188	73,0 78,0 83,0	73,6 78,6 83,6	74,3 79,3 84,3	75,0 80,0 85,0	75,6 80,6 85,6	76,2 81,2 86,2	76,9 81,9 86,9	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164 170-176 182-188	61,9 63,9 67,9	61,9 63,9 67,9	62,0 64,0 68,0	62,0 64,0 68,0	62,1 64,1 68,1	62,1 64,1 68,1	62,2 64,2 68,2	(+/-)1,0
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	19,8	20,4	21,0	21,6	22,2	22,9	23,5	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	14,5	14,7	15,0	15,2	15,4	15,6	15,8	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	12,9	12,9	12,9	12,9	13,8	13,8	13,8	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	все роста	15,0	15,0	15,0	15,0	15,4	15,4	15,4	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	16,7	16,7	17,6	17,6	18,5	18,5	18,5	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	19,9	19,9	20,3	20,3	20,6	20,6	20,6	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	48,6	49,4	50,3	51,2	52,0	52,8	53,5	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В134.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	158-164 170-176 182-188	74,8 79,8 84,8	75,0 80,0 85,0	75,2 80,2 85,2	75,5 80,5 85,5	75,7 80,7 85,7	75,9 80,9 85,9	76,1 81,1 86,1	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	51,6	52,4	53,2	54,0	54,8	55,6	56,4	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164 170-176 182-188	77,5 82,5 87,5	78,1 83,1 88,1	78,7 83,7 88,7	79,3 84,3 89,3	80,0 85,0 90,0	80,7 85,7 90,7	81,5 86,5 91,5	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	67,6	69,5	71,5	73,5	75,5	77,5	79,5	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164 170-176 182-188	62,3 64,3 68,3	62,4 64,4 68,4	62,4 64,4 68,4	62,5 64,5 68,5	62,5 64,5 68,5	62,5 64,5 68,5	62,5 64,5 68,5	(+/-)1,0
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	24,2	25,0	25,8	26,5	27,2	27,8	28,5	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	16,0	16,2	16,5	16,8	17,0	17,3	17,6	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	13,8	14,8	14,8	14,8	14,8	15,7	15,7	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	все роста	15,4	16,0	16,0	16,0	16,0	16,7	16,7	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	19,5	19,5	19,5	20,5	20,5	21,8	21,8	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	21,7	21,7	21,7	22,0	22,0	22,3	22,3	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	54,3	55,2	56,2	57,2	58,2	60,2	60,8	(+/-)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 447 из 529

В135. Куртка медицинская мужская модель 402К.

Описание модели

Куртка, комбинированная из тканей двух цветов, длиной ниже линии бёдер, прямого силуэта, умеренного объема, с отрезными бочками, без боковых швов; со смещёнными на 3,0см вперед плечевыми швами; с фигурной линией низа.

Перед с центральной застёжкой до верха на 5 вертикально обмётанных петель и 5 пуговиц; с двумя верхними накладными карманами фигурной формы; с вертикальными швами, выходящими из нижней части пройм и доходящими до низа; с двумя нижними накладными карманами фигурной формы.

Спинка с притачной кокеткой; с вертикальными швами, выходящими из нижней части пройм и доходящими до низа; с двумя дугообразными швами, проходящими параллельно проймам на расстоянии 2,5-2,7см из шва притачивания кокетки до швов притачивания бочков. В швах подрезов заложены складки глубиной 3,0см для обеспечения свободы движения.

Рукава втачные, одношовные, короткие (длиной выше локтя).

Воротник-стойка, застегивающаяся на одну обмётанную петлю и одну пуговицу.

Перед, спинка и карманы должны быть выполнены из основной ткани №1, а бочки, рукава, кокетка спинки и воротник – из основной ткани №2.

По кокеткам, швам притачивания бочков и швам настрачивания карманов, по краям стойки и складок на спинке должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

По верхним краям карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,8-2,0 см от края.

По низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 0,6-0,7см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы пластиковые пуговицы диаметром 1,6-1,8см или металлические кнопки диаметром 1,0-1,2 см.

Для изготовления изделия используются нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

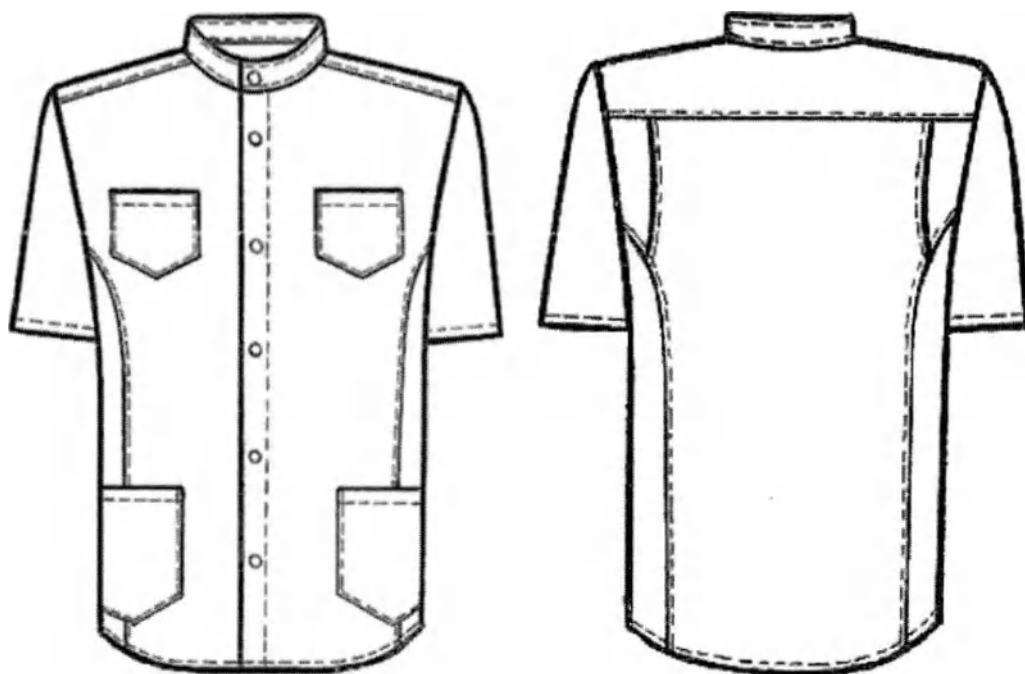


Рисунок В135–Куртка медицинская мужская модель 402К

Таблица В135.1 Спецификация деталей кроя Куртка медицинская мужская модель 402К

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань №1			
1	Полочка	2	1
2	Спинка	1	0
3	Верхний карман	2	1
4	Нижний карман	2	1
5	Верхняя боковая часть спинки	2	1
6	Обтачка спинки	2	1
Основная ткань №2			
7	Бочок	2	1
8	Рукав	2	1
9	Кокетка	1	0
10	Воротник	2	1
Итого		19	8

Таблица В135.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Куртка медицинская мужская 402К

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	69.8	70.0	70.3	70.5	70.7	71.0	71.3	(±)1.0
		170-176	73.8	74.0	74.3	74.5	74.7	75.0	75.3	
		182-188	77.8	78.0	78.3	78.5	78.7	79.0	79.3	

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	45,0	45,9	46,8	47,7	48,5	49,3	50,1	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164	71,4	72,0	72,6	73,1	73,8	74,5	75,2	(±)1,0
		170-176	75,4	76,0	76,6	77,1	77,8	78,5	79,2	
		182-188	79,4	80,0	80,6	81,1	81,8	82,5	83,2	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,8	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164	21,6	21,8	22,1	22,5	22,5	22,7	22,9	(±)0,5
		170-176	23,6	23,8	24,1	24,5	24,5	24,7	24,9	
		182-188	25,6	25,8	26,1	26,5	26,5	26,7	26,9	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	20,5	21,1	21,7	22,3	22,8	23,4	24,1	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	19,2	19,7	20,2	20,7	21,2	21,7	22,2	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	10,6	11,1	11,1	11,6	11,6	12,0	12,0	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	все роста	12,5	12,6	12,6	12,8	12,8	12,8	12,8	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	19,0	19,0	19,9	19,9	19,9	19,9	21,9	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана посередине, см	все роста	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	20,1	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	45,0	46,0	47,0	48,0	49,1	50,3	51,4	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В135.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	71,6	72,0	72,4	72,7	73,0	73,3	73,6	(±)1,0
		170-176	75,6	76,0	76,4	76,7	77,0	77,3	77,6	
		182-188	79,6	80,0	80,4	80,7	81,0	81,3	81,6	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	50,9	51,7	52,5	53,2	54,0	54,7	55,4	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164	75,8	76,5	77,3	78,0	78,7	79,4	80,0	(±)1,0
		170-176	79,8	80,5	81,3	82,0	82,7	83,4	84,0	
		182-188	83,8	84,5	85,3	86,0	86,7	87,4	88,0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	81,0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	67,0	69,2	71,3	73,4	75,5	77,6	79,7	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164	22,9	23,2	23,5	23,6	23,8	24,0	24,2	(±)0,5
		170-176	24,9	25,2	25,5	25,6	25,8	26,0	26,2	
		182-188	26,9	27,2	27,5	27,6	27,8	28,0	28,2	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	24,8	25,5	26,3	27,0	27,7	28,4	29,1	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	22,7	23,3	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	12,0	12,6	12,6	13,0	13,0	13,5	13,5	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	все роста	12,8	13,2	13,2	13,3	13,3	13,5	13,5	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	21,9	21,9	21,9	23,0	23,0	23,0	23,0	(+/-)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

12	Глубина нижнего кармана посередине, см	все роста	20,1	20,1	20,1	20,5	20,5	20,5	20,5	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	52,5	53,6	54,8	55,9	57,0	58,1	59,2	(+/-)0,5

В136. Куртка медицинская мужская модель 403К.

Описание модели

Куртка медицинская мужская длиной ниже линии бедер, прямого силуэта, свободного покроя.

Перед с центральной бортовой застежкой до верха на 5 обметанных петель и 5 пуговиц; с отрезными кокетками; с одним верхним накладным карманом на левой полочке, расположенным на 1,5 см ниже шва притачивания кокетки; с горизонтальным подрезом ниже линии талии; с двумя боковыми накладными карманами, расположенными на 1,8 см ниже подреза. В швы над верхним и нижними карманами должны быть вшиты декоративные паты шириной 3,4-3,6 см, прикрепляющиеся к ним с помощью пуговиц.

Спинка с отрезной кокеткой.

Рукава втачные, одношовные, длиной выше локтя.

Воротник стояче-отложной, с отрезной стойкой, застегивающейся на одну обметанную петлю и 1 пуговицу.

Кокетки переда могут быть выполнены из отделочной ткани.

По краям воротника, стойки, бортов, пат, по швам подрезов, кокеток, а также швам настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По верхним краям карманов и низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,3-2,5 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы пластиковые пуговицы диаметром 1,8-2,2 см.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

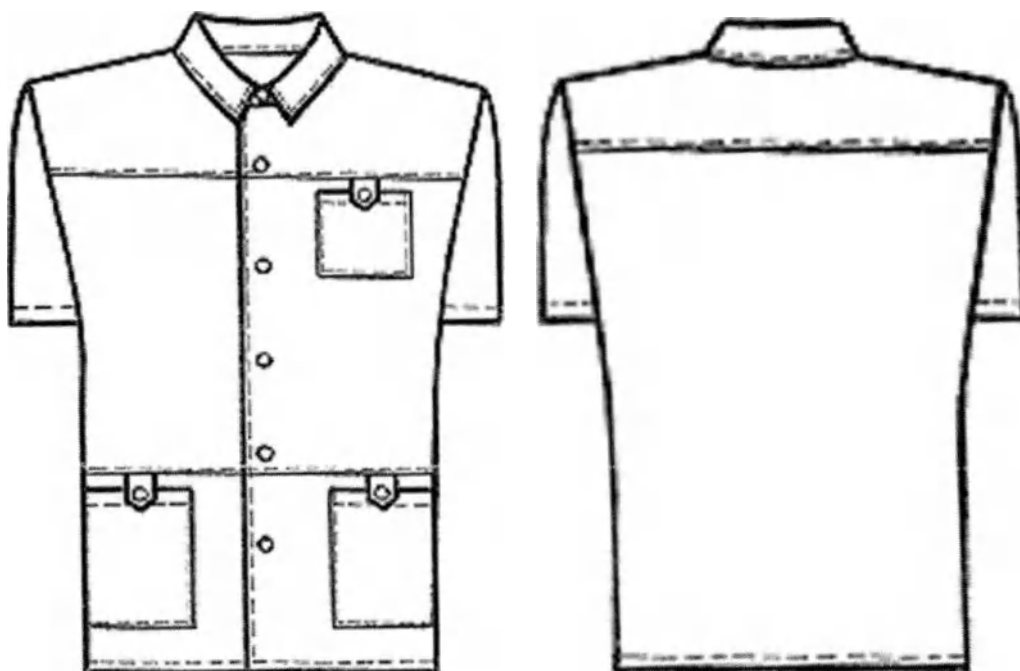


Рисунок В136–Куртка медицинская мужская модель 403К

Таблица В136.1 Спецификация деталей кроя Куртка медицинская мужская модель 403К

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Средняя часть полочки	2	1
2	Нижняя часть полочки	2	1
3	Спинка	1	0
4	Кокетка спинки	1	0
5	Рукав	2	1
6	Верхний карман	1	0
7	Нижний карман	2	1
8	Воротник	2	1
9	Стойка воротника	2	1
10	Пата	6	3
11	Подборт	2	1
Отделочная ткань			
12	Кокетка полочки	2	1
Итого		25	11

Таблица В136.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Куртка медицинская мужская 403К

№	Наименование измерения	Рост	Размер	
---	------------------------	------	--------	--

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

			44	46	48	50	52	54	56	Допуск, см
1	Длина спинки посередине см	158-164 170-176 182-188	74,8 79,8 84,8	75,0 80,0 85,0	75,0 80,0 85,0	75,1 80,1 85,1	75,3 80,3 85,3	75,5 80,5 85,5	75,7 80,7 85,7	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте см	все роста	44,6	45,5	46,5	47,4	48,3	49,1	49,9	(+/-)1,0
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа см	158-164 170-176 182-188	74,7 79,7 84,7	75,2 80,2 85,2	75,9 80,9 85,9	76,5 81,5 86,5	77,2 82,2 87,2	77,8 82,8 87,8	78,4 83,4 88,4	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы см	все роста	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	67,5	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки) см	все роста	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава см	158-164 170-176 182-188	24,4 26,4 28,4	24,8 26,8 28,8	24,8 26,8 28,8	25,1 27,1 29,1	25,4 27,4 29,4	25,7 27,7 29,7	26,1 28,1 30,1	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой см	все роста	20,3	20,9	21,5	22,1	22,7	23,4	24,0	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу см	все роста	19,3	19,7	20,3	20,7	21,2	21,7	22,3	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана см	все роста	12,9	12,9	13,2	13,2	13,2	13,8	13,8	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю см	все роста	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа см	все роста	17,5	18,1	18,2	18,5	19,2	20,3	20,3	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана см	все роста	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлету см	все роста	52,4	53,2	54,0	54,8	56,0	57,0	58,0	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В136.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине см	158-164 170-176 182-188	75,9 80,9 85,9	76,0 81,0 86,0	76,1 81,1 86,1	76,5 81,5 86,5	76,8 81,8 86,8	77,0 82,0 87,0	77,1 82,1 87,1	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте см	все роста	50,6	51,4	52,0	52,6	53,3	54,1	53,9	(+/-)1,0
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа см	158-164 170-176 182-188	79,0 84,0 89,0	79,6 84,6 89,6	80,2 85,2 90,2	80,8 85,8 90,8	81,3 86,3 91,3	81,8 86,8 91,8	82,3 87,3 92,3	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы см	все роста	69,5	71,5	73,5	75,5	77,5	79,5	81,5	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки) см	все роста	67,0	69,0	71,1	73,2	75,3	77,5	79,7	(+/-)1,0
6	Длина рукава см	158-164 170-176 182-188	26,4 28,4 30,4	26,5 28,5 30,5	27,0 29,0 31,0	27,3 29,3 31,3	27,7 29,7 31,7	28,1 30,1 32,1	28,5 30,5 32,5	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой см	все роста	24,7	25,5	26,3	27,0	27,7	28,3	29,0	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу см	все роста	22,7	23,5	24,3	24,9	25,4	26,3	26,8	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана см	все роста	14,4	14,7	14,7	14,7	15,0	15,0	15,5	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю см	все роста	12,9	13,1	13,4	13,4	13,5	13,5	14,0	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа см	все роста	21,1	22,2	22,5	22,5	23,0	23,5	24,0	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана см	все роста	18,0	18,2	18,8	18,8	19,0	19,0	19,0	(+/-)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	59.0	60.0	60.5	61.0	62.0	63.0	64.0	(+/-)0,5

В137. Куртка медицинская мужская модель 404К.

Описание модели

Куртка длиной ниже линии бедер, прямого силуэта, свободного покроя; с разрезами в боковых швах.

Перед с отложными лацканами до линии груди; с центральной бортовой застежкой на 4 кнопки или пуговицы; с притачными кокетками; с одним верхним накладным карманом с фигурным передним краем на левой полочке; с декоративной патой шириной 3,4-3,6см, вшитой одним концом в шов притачивания кокетки над серединой кармана, а другим концом треугольной формы пристегивающейся к карману на кнопку или пуговицу; с двумя нижними накладными карманами с фигурными передними краями, задними боковыми срезами входящими в боковые швы.

Спинка с притачной кокеткой, со средним швом и декоративной патой шириной 3,4-3,6см, вшитой одним концом в шов притачивания кокетки над средним швом, а другим концом треугольной формы, пристегивающейся к спинке на кнопку или пуговицу.

Рукава втачные, одношовные, короткие (длиной выше локтя), с декоративными патами шириной 3,4-3,6см, вшитыми одним концом в подгибку посередине рукавов, а другим концом треугольной формы пристегивающимися к рукавам на кнопку или пуговицу.

Воротник – отложной, «пиджачного» типа.

Декоративные паты переда, спинки и рукавов могут быть выполнены из отделочной гладкокрашеной ткани.

По краям бортов, лацканам, горловине переда, кокеткам, патам, воротнику и швам настрачивания карманов должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8см от края или шва.

На верхнем кармане должна быть проложена сквозная вертикальная строчка от верха до низа кармана на расстоянии 3,7-3,8см от переднего края кармана.

По верхним краям карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,3-2,5см от края.

По низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 3,1-3,3см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

По разрезам и шву втачивания воротника в горловину спинки должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

В качестве фурнитуры должны быть использованы кнопки диаметром 1,2-1,4см или пуговицы диаметром 1,3 см для пат и 1,9см для застежки.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

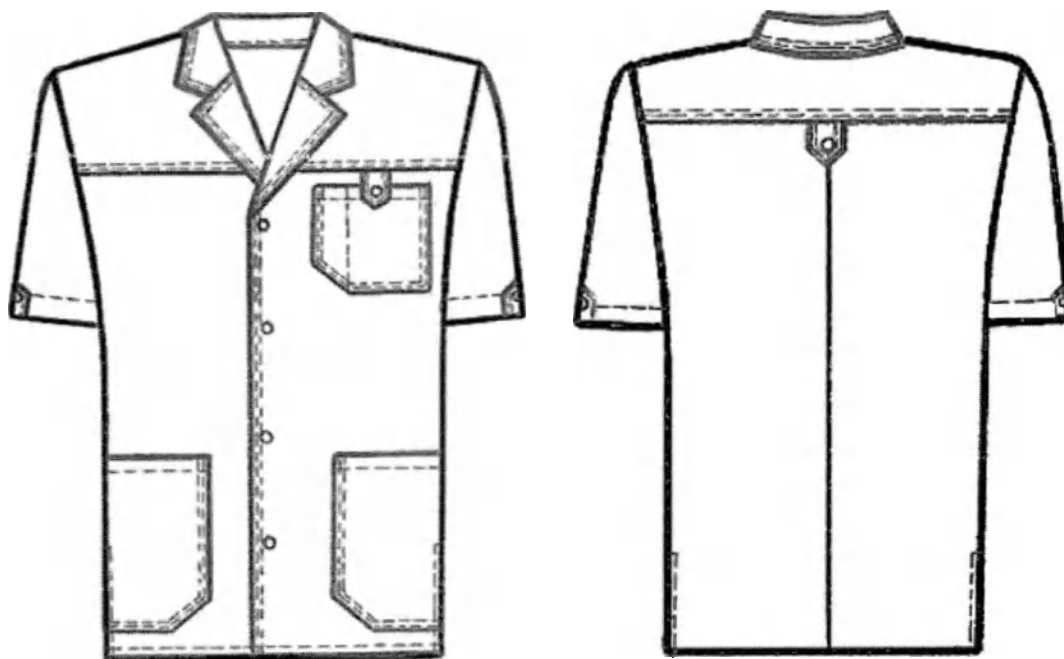


Рисунок В137–Куртка медицинская мужская модель 404К

Таблица В137.1 Спецификация деталей кроя Куртка медицинская мужская модель 404К

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Спинка	2	1
3	Кокетка полочки	2	1
4	Кокетка спинки	1	0
5	Рукав	2	1
6	Верхний карман	1	0
7	Нижний карман	2	1
8	Воротник	2	1
9	Подборт	2	1
10	Пата спинки	2	1
11	Пата кармана	2	1
12	Пата рукава	4	2
Итого		24	11

Таблица В137.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Куртка медицинская мужская 404К

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	70.6	70.8	71.0	71.3	71.6	71.8	72.0	(+/-)1,0

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

		170-176 182-188	74,6 78,6	74,8 78,8	75,0 79,0	75,3 79,3	75,6 79,6	75,8 79,8	76,0 80,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	44,1	45,0	46,0	46,9	47,8	48,6	49,4	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164 170-176 182-188	71,7 75,7 79,7	72,2 76,2 80,2	72,9 76,9 80,9	73,5 77,5 81,5	74,2 78,2 82,2	74,8 78,8 82,8	75,4 79,4 83,4	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164 170-176 182-188	24,4 26,4 28,4	24,8 26,8 28,8	24,8 26,8 28,8	25,1 27,1 29,1	25,4 27,4 29,4	25,7 27,7 29,7	26,1 28,1 30,1	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	19,6	20,2	20,8	21,4	22,0	22,7	23,3	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	18,8	19,2	19,8	20,2	20,7	21,2	21,8	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	13,0	13,4	13,4	13,8	13,8	13,8	14,4	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,5	12,8	12,8	13,4	13,4	13,4	13,7	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	17,5	18,1	19,0	19,0	19,3	19,3	20,1	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана посередине, см	все роста	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,6	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В137.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	158-164 170-176 182-188	72,3 76,3 80,3	72,4 76,4 80,4	72,8 76,8 80,8	73,0 77,0 81,0	73,3 77,3 81,3	73,5 77,5 81,5	73,6 77,6 81,6	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	50,1	50,9	51,5	52,1	52,8	53,6	53,4	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164 170-176 182-188	76,0 80,0 84,0	76,6 80,6 84,6	77,2 81,2 85,2	77,8 81,8 85,8	78,3 82,3 86,3	78,8 82,8 86,8	79,3 83,3 87,3	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	81,0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	65,5	67,5	69,6	71,7	73,8	76,0	78,2	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164 170-176 182-188	26,4 28,4 30,4	26,5 28,5 30,5	27,0 29,0 31,0	27,3 29,3 31,3	27,7 29,7 31,7	28,1 30,1 32,1	28,5 30,5 32,5	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	24,0	24,8	25,6	26,3	27,0	27,6	28,3	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	22,2	23,0	23,8	24,4	24,9	25,8	26,3	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	14,4	14,4	14,8	14,8	14,8	15,2	15,2	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	13,7	13,7	13,8	13,8	13,8	14,0	14,0	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	20,1	20,8	20,8	20,8	21,4	22,2	22,2	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана посередине, см	все роста	20,6	20,8	20,8	20,8	20,9	21,0	21,0	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	53,0	54,0	54,9	55,8	56,7	57,6	58,5	(+/-)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многократного использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 456 из 529

В138. Куртка медицинская мужская модель 405К.

Описание модели

Куртка длиной ниже линии бедер, прямого силуэта, свободного покроя; с разрезами в боковых швах.

Перед с притачной кокеткой, с центральной застежкой на кокетке (от горловины до шва притачивания кокетки) на 3 кнопки; с одним верхним накладным карманом с левой стороны переда, пришитым ниже шва притачивания кокетки; с одной декоративной патой шириной 3,4-3,6см, вшитой одним концом в шов притачивания кокетки над серединой кармана, а другим концом треугольной формы пристегивающейся к карману на кнопку; с двумя нижними накладными карманами, задними срезами входящими в боковые швы, а нижними – в подгибку низа изделия.

Спинка со средним швом.

Рукава втачные, одношовные, короткие (длиной выше локтя).

Воротник – стойка.

По кокетке, краям воротника, паты, разрезов, застежки, по швам настрачивания карманов и шву втачивания воротника в горловину должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

По верхним краям карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,8-2,0см.

На верхнем кармане должна быть проложена сквозная вертикальная строчка от верха до низа кармана на расстоянии 5,0-5,2см от переднего края кармана.

По низу изделия и низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,0-1,2см.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188

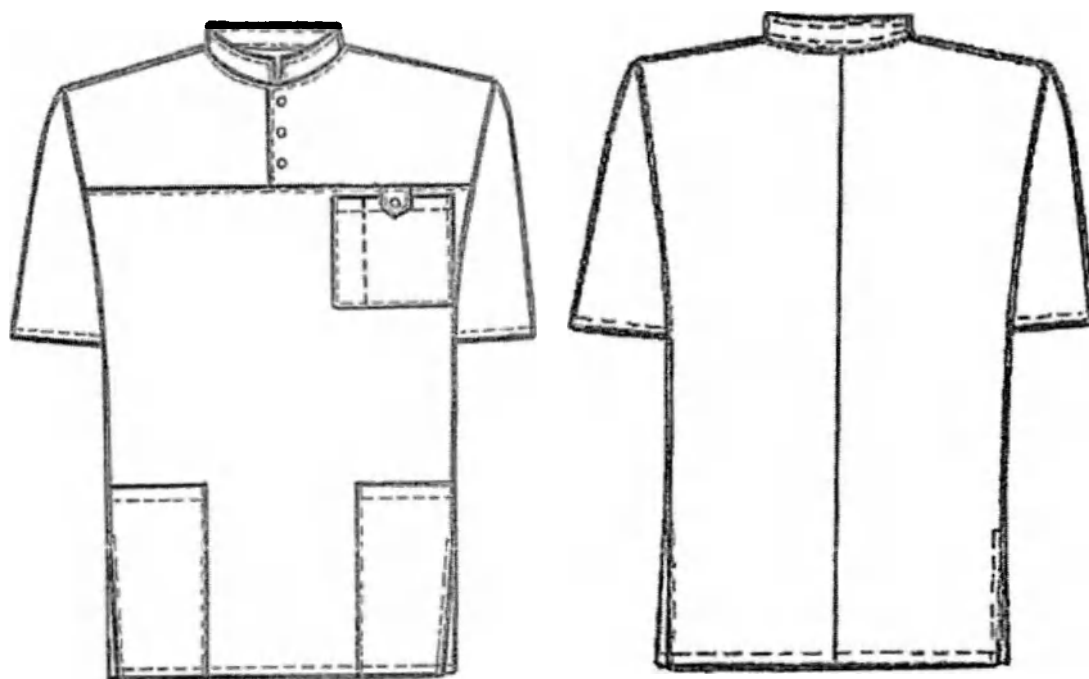


Рисунок В138– Куртка медицинская мужская модель 405К

Таблица В138.1 Спецификация деталей кроя Куртка медицинская мужская модель 405К

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Перед	1	0
2	Спинка	2	1
3	Кокетка переда	2	1
4	Верхний карман	1	0
5	Нижний карман	2	1
6	Рукав	2	1
7	Воротник	2	1
8	Пата	2	1
9	Обтачка застежки	2	1
Итого		16	7

Таблица В138.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Куртка медицинская мужская 405К

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	70.8	71.0	71.1	71.2	71.5	71.7	72.0	(±)1,0
		170-176	74.8	75.0	75.1	75.2	75.5	75.7	76.0	
		182-188	78.8	79.0	79.1	79.2	79.5	79.7	80.0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	44.1	45.0	46.0	46.9	47.8	48.6	49.4	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164 170-176 182-188	72,3 76,3 80,3	72,8 76,8 80,8	73,5 77,5 81,5	74,1 78,1 82,1	74,8 78,8 82,8	75,4 79,4 83,4	76,0 80,0 84,0	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	54,3	56,3	58,3	60,3	62,3	64,3	66,3	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164 170-176 182-188	25,0 27,0 29,0	25,2 27,2 29,2	25,5 27,5 29,5	25,6 27,6 29,6	25,9 27,9 29,9	26,1 28,1 30,1	26,3 28,3 30,3	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	19,8	20,5	21,2	21,9	22,4	23,3	24,0	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	19,0	19,4	20,0	20,4	20,9	21,4	22,0	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	13,5	13,5	13,5	14,0	14,0	14,0	14,4	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,7	12,8	12,9	13,4	13,4	13,4	13,7	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	17,0	17,4	17,7	18,1	18,5	19,0	19,5	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	19,5	19,5	19,6	19,7	19,8	19,8	20,0	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	42,0	43,0	44,0	45,0	46,2	47,2	47,8	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В138.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	158-164 170-176 182-188	72,1 76,1 80,1	72,2 76,2 80,2	72,6 76,6 80,6	72,8 76,8 80,8	73,0 77,0 81,0	73,2 77,2 81,2	73,4 77,4 81,4	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	50,1	50,9	51,5	52,1	52,8	53,6	53,4	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164 170-176 182-188	76,6 80,6 84,6	77,2 81,2 85,2	77,8 81,8 85,8	78,4 82,4 86,4	78,9 82,9 86,9	79,4 83,4 87,4	79,9 83,9 87,9	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	68,3	70,3	72,3	74,3	76,3	78,3	80,3	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164 170-176 182-188	26,7 28,7 30,7	26,9 28,9 30,9	27,4 29,4 31,4	27,8 29,8 31,8	28,1 30,1 32,1	28,6 30,6 32,6	29,0 31,0 33,0	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	24,7	25,5	26,4	27,0	27,8	28,5	29,2	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	22,4	23,2	24,0	24,6	25,1	26,0	26,5	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	14,4	14,4	14,7	14,7	14,7	15,2	15,2	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	13,7	13,7	13,8	13,8	13,8	13,8	14,2	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	20,0	20,5	20,9	21,5	22,1	22,4	22,5	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,4	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	48,8	49,8	50,8	51,6	52,8	54,6	55,8	(+/-)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоцелевого использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 459 из 529

В139. Куртка медицинская мужская модель 407К.

Описание модели

Куртка медицинская длиной ниже линии бедер; прямого силуэта, свободного покроя, с удлинённым на 2,0 см плечевым швом; с боковыми разрезами, без воротника. Горловина V – образной формы, обработана на спинке обтачкой, а на передё – притачными планками шириной 2,7 – 2,9 см.

Перед с отрезной кокеткой, в шов притачивания которой входят концы планок горловины; с одним верхним накладным карманом, расположенным на левой стороне передё на 1,0 см ниже шва притачивания кокетки; с двумя боковыми накладными карманами, нижние срезы которых входят в подгибку низа изделия.

Спинка с притачной кокеткой и средним швом.

Рукава втачные, одношовные, короткие (до локтя).

По горловине, разрезам, кокеткам, швам притачивания планок к горловине и швам настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

На верхнем кармане должна быть проложена сквозная вертикальная строчка от верха до низа кармана на расстоянии 5,0-5,2см от переднего края кармана.

По верхним краям карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,8-3,0см от края.

По низу рукавов и низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

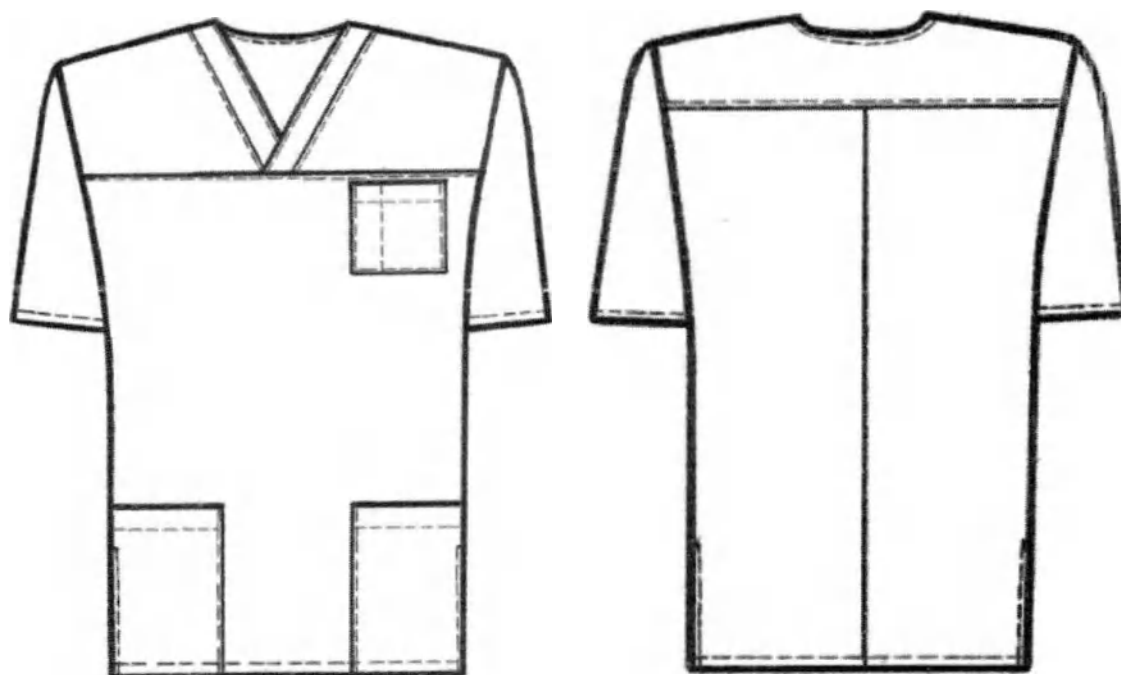


Рисунок В139– Куртка медицинская мужская модель 407К

Таблица В139.1 Спецификация деталей кроя Куртка медицинская мужская модель 407К

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Полочка	1	0
2	Спинка	2	1
3	Кокетка полочки	2	1
4	Кокетка спинки	1	0
5	Рукав	2	1
6	Верхний карман	1	0
7	Нижний карман	2	1
8	Планка горловины	2	1
9	Обтачка горловины спинки	1	0
	Итого	14	5

Таблица В139.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Куртка медицинская мужская 407К

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	68,9	69,0	69,2	69,5	69,6	69,8	70,0	(±)1,0
		170-176	72,9	73,0	73,2	73,5	73,6	73,8	74,0	
		182-188	76,9	77,0	77,2	77,5	77,6	77,8	78,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	44,8	45,8	46,7	47,6	48,5	49,4	50,3	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164	68,1	68,8	69,5	70,2	71,0	71,6	72,3	(±)1,0
		170-176	72,1	72,8	73,5	74,2	75,0	75,6	76,3	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
		182-188	76,1	76,8	77,5	78,2	79,0	79,6	80,3	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	67,5	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164	22,1	22,2	22,3	22,5	22,6	22,8	23,1	(±)0,5
		170-176	24,1	24,2	24,3	24,5	24,6	24,8	25,1	
		182-188	26,1	26,2	26,3	26,5	26,6	26,8	27,1	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	19,9	20,6	21,3	22,0	22,7	23,4	23,8	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	18,8	19,3	19,8	20,4	21,0	21,6	22,2	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	12,8	12,8	12,8	13,3	13,3	13,3	13,3	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	13,2	13,2	13,2	13,8	13,8	13,8	13,8	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	17,5	17,8	18,0	18,5	19,1	19,3	19,3	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	21,3	21,3	21,3	21,8	21,8	21,8	21,8	(+/-)0,3

Продолжение Таблицы В139.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	70,3	70,5	70,7	71,0	71,2	71,5	71,7	(±)1,0
		170-176	74,3	74,5	74,7	75,0	75,2	75,5	75,7	
		182-188	78,3	78,5	78,7	79,0	79,2	79,5	79,7	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	51,2	52,1	53,0	53,9	54,8	55,8	56,8	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164	73,0	73,7	74,4	75,0	75,7	76,4	77,2	(±)1,0
		170-176	77,0	77,7	78,4	79,0	79,7	80,4	81,2	
		182-188	81,0	81,7	82,4	83,0	83,7	84,4	85,2	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	69,5	71,5	73,4	75,2	77,0	78,8	80,6	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164	23,2	23,4	23,7	24,0	24,5	24,9	25,2	(±)0,5
		170-176	25,2	25,4	25,7	26,0	26,5	26,9	27,2	
		182-188	27,2	27,4	27,7	28,0	28,5	28,9	29,2	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	24,5	25,5	26,2	26,9	27,4	28,3	29,0	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	22,8	23,4	23,9	24,4	25,0	25,5	26,2	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	13,3	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	13,8	13,8	14,0	14,0	14,3	14,3	14,3	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	19,3	19,3	19,8	19,8	19,8	20,6	20,8	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	21,8	21,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	(+/-)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 462 из 529

В140. Куртка медицинская мужская модель 408К.

Описание модели

Куртка медицинская мужская длиной ниже линии бедер, прямого силуэта, умеренного объема, с фигурной линией низа. Изделие без плечевых швов, с кокеткой на спинке переходящей на перед на 5,0 см.

Перед с центральной застёжкой на 6 кнопок, обработанной цельновыкроенными планками; с двумя декоративными планками шириной 2,9 – 3,1 см, вшитыми одной стороной в швы притачивания кокетки; с двумя вертикальными швами, выходящими из нижней части пройм и доходящими до низа; с двумя верхними накладными карманами с клапанами и двумя нижними накладными карманами фигурной формы. На верхних карманах должны быть выполнены по два вертикальных подреза. Клапан должен пристегиваться к карману на кнопку. Нижние карманы должны быть оформлены планками шириной 3,3 – 3,5 см по верхним краям и двумя вертикальными подрезами.

Спинка с двумя вертикальными швами, выходящими из нижней части пройм и доходящими до низа; с двумя дугообразными швами, проходящими параллельно проймам на расстоянии 2,5 – 2,7 см из шва притачивания кокетки до швов притачивания бочков. В швах подрезов должны быть заложены складки глубиной 3,0 см для обеспечения свободы движения.

Рукава втачные, одношовные, длиной выше локтя.

Нижние края рукавов должны быть оформлены притачными отложными манжетами шириной 3,2 – 3,4 см и декоративными патами шириной 3,2 – 3,4 см, вшитыми одним концом в швы притачивания манжет посередине рукавов, а другим концом треугольной формы пристегивающимися к рукавам на кнопки.

Воротник стояче – отложной, на отрезной стойке, застегивающейся на одну кнопку.

По швам притачивания кокетки, бочков переда и спинки, краям воротника, пат, клапанов, планок карманов, вертикальным подрезам и швам настрачивания карманов должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1 – 0,2 и 0,7 – 0,8 см от края и шва.

По краям бортов, шву притачивания стойки к воротнику, шву втачивания стойки в горловину и краям складок в подрезах на спинке должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1 – 0,2 см от края или шва.

Вдоль застёжки должна быть проложена строчка на расстоянии 2,8 – 3,0 см от края борта.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,0-1,1 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 463 из 529

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

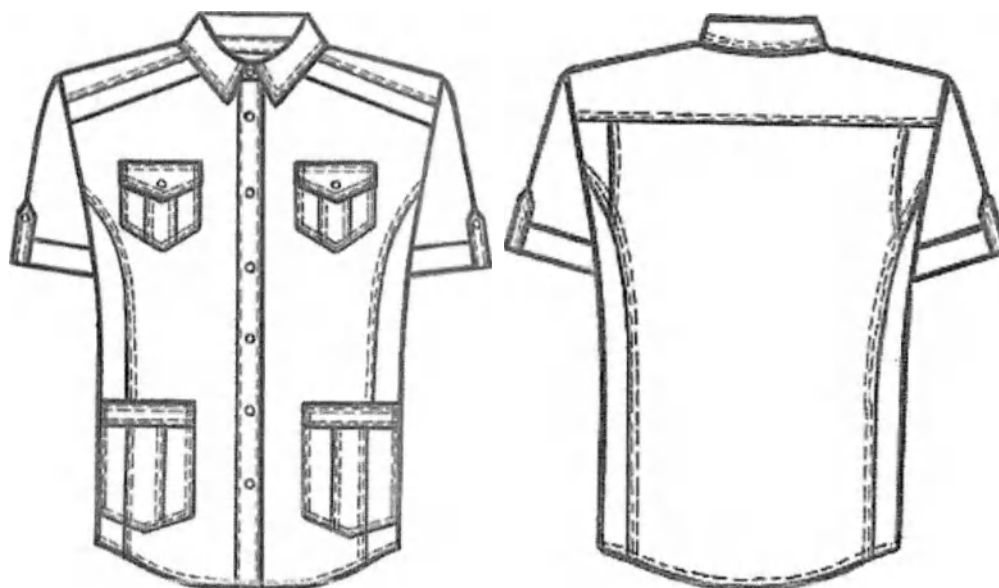


Рисунок В140– Куртка медицинская мужская модель 408К

Таблица В140.1 Спецификация деталей кроя Куртка медицинская мужская модель 408К

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	1	0
4	Бочок спинки	2	1
5	Верхняя боковая часть спинки	2	1
6	Кокетка	1	0
7	Отлетная деталь полочки	2	1
8	Рукав	2	1
9	Манжета	2	1
10	Клапан	4	2
11	Боковая часть верхнего кармана	4	2
12	Средняя часть верхнего кармана	2	1
13	Боковая часть нижнего кармана	4	2
14	Средняя часть нижнего кармана	2	1
15	Планка нижнего кармана	2	1
16	Воротник	2	1
17	Стойка воротника	2	1
18	Обтачка спинки	2	1
19	Обтачка верхнего кармана	2	1
20	Пата рукава	4	2
	Итого:	46	22

Таблица В140.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Куртка медицинская мужская 408К

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина спинки посередине, см	158-164 170-176 182-188	67,9 71,9 73,9	68,0 72,0 74,0	68,1 72,1 74,1	68,2 72,2 74,2	68,3 72,3 74,3	68,5 72,5 74,5	68,7 72,7 74,7	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	44,4	45,4	46,2	47,2	48,2	49,0	50,0	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164 170-176 182-188	69,0 73,0 75,0	69,6 73,6 75,6	70,2 74,2 76,2	70,7 74,7 76,7	71,4 75,4 77,4	72,1 76,1 78,1	72,8 76,8 78,8	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки) см	все роста	51,6	53,6	55,6	57,6	59,6	61,6	63,6	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164 170-176 182-188	21,1 23,1 24,1	21,3 23,3 24,3	21,5 23,5 24,5	21,9 23,9 24,9	22,0 24,0 25,0	22,1 24,1 25,1	22,3 24,3 25,3	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	20,3	20,8	21,2	21,7	22,4	23,0	23,7	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	19,2	19,7	20,2	20,7	21,2	21,7	22,2	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	11,0	11,0	11,0	12,0	12,0	12,0	12,0	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	17,0	17,0	17,0	17,9	17,9	18,9	18,9	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	17,7	17,7	17,7	17,9	17,9	18,1	18,1	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	51,6	52,4	53,2	54,0	54,8	55,6	57,4	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В140.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	158-164 170-176 182-188	69,1 73,1 75,1	69,5 73,5 75,5	70,0 74,0 76,0	70,2 74,2 76,2	70,4 74,4 76,4	70,6 74,6 76,6	70,8 74,8 76,8	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	51,0	51,8	52,6	53,4	54,2	55,0	55,8	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164 170-176 182-188	73,4 77,4 79,4	74,1 78,1 80,1	74,9 78,9 80,9	75,6 79,6 81,6	76,4 80,4 82,4	77,0 81,0 83,0	77,6 81,6 83,6	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	68,5	70,5	72,5	74,5	76,5	78,5	80,5	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки) см	все роста	65,6	67,6	69,6	71,6	73,6	75,6	77,6	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164 170-176 182-188	22,5 24,5 25,5	22,6 24,6 25,6	22,8 24,8 25,8	22,9 24,9 25,9	23,1 25,1 26,1	23,2 25,2 26,2	23,4 25,4 26,4	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	24,4	25,1	25,8	26,5	27,2	27,9	28,6	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	22,7	23,3	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	12,8	12,8	12,8	13,5	13,5	13,5	13,5	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,3	12,3	12,3	12,5	12,5	12,5	12,5	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	18,9	18,9	18,9	20,0	20,0	20,0	20,0	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	18,1	18,8	18,8	19,0	19,0	19,0	19,0	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	58,2	59,0	60,0	60,8	61,6	62,4	63,2	(+/-)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINSTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 465 из 529

В141. Куртка медицинская мужская модель 408-1К.

Описание модели

Куртка медицинская мужская длиной ниже линии бёдер, прямого силуэта, умеренного объёма, с фигурной линией низа. Изделие без плечевых швов, с кокеткой на спинке переходящей на перед на 5,0 см.

Перед с центральной застёжкой на 6 кнопок, обработанной цельновыкроенными планками; с двумя декоративными планками шириной 2,9 – 3,1 см, вшитыми одной стороной в швы притачивания кокетки; с двумя вертикальными швами, выходящими из нижней части пройм и доходящими до низа; с двумя верхними и двумя нижними накладными карманами фигурной формы. Верх карманов должен быть оформлен планками шириной 3,3 – 3,5 см.

Спинка с двумя вертикальными швами, выходящими из нижней части пройм и доходящими до низа; с двумя дугообразными швами, проходящими параллельно проймам на расстоянии 2,5 – 2,7 см из шва притачивания кокетки до швов притачивания бочков. В швах подрезов должны быть заложены складки глубиной 3,0 см для обеспечения свободы движения.

Рукава втачные, одношовные, длиной выше локтя.

Нижние края рукавов должны быть оформлены притачными отложными манжетами шириной 3,2 – 3,4 см.

Воротник стояче – отложной, на отрезной стойке, застегивающейся на одну кнопку.

По швам притачивания кокетки, бочков переда и спинки, краям воротника, планок карманов и швам настрачивания карманов должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1 – 0,2 и 0,7 – 0,8 см от края и шва.

По краям бортов, шву притачивания стойки к воротнику, шву втачивания стойки в горловину и краям складок в подрезах на спинке должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1 – 0,2 см от края или шва.

Вдоль застёжки должна быть проложена строчка на расстоянии 2,8 – 3,0 см от края борта.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,0 – 1,1 см.

Для изготовления изделия используются нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 466 из 529

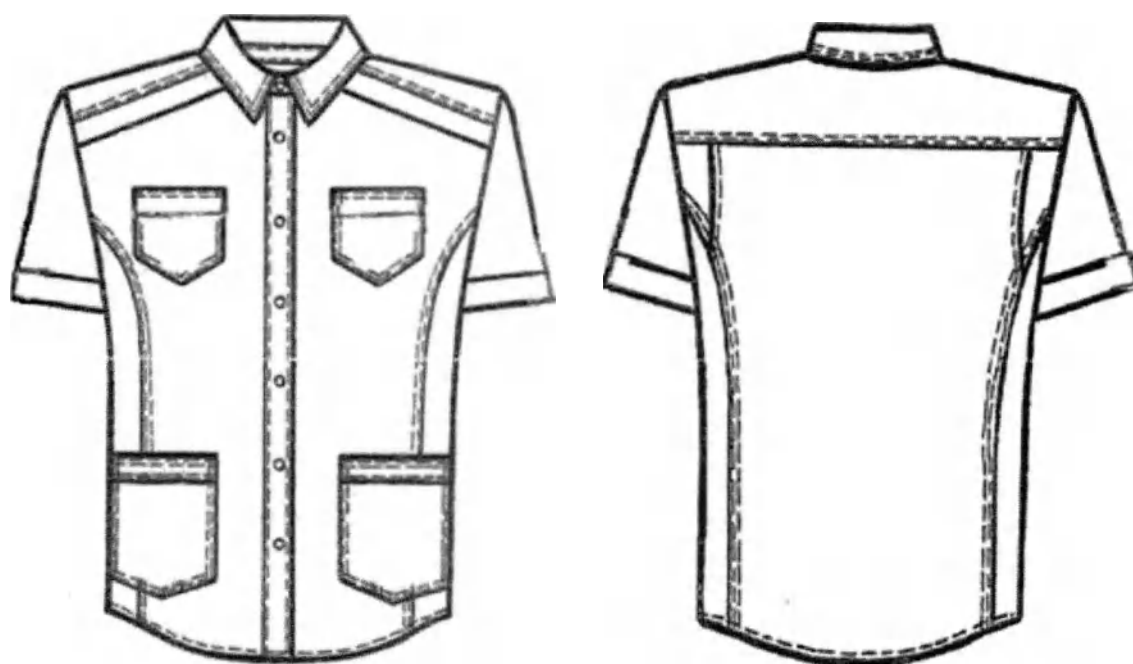


Рисунок В141– Куртка медицинская мужская модель 408-1К

Таблица В141.1 Спецификация деталей кроя Куртка медицинская мужская модель 408-1К

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Бочок полочки	2	1
3	Спинка	1	0
4	Бочок спинки	2	1
5	Верхняя боковая часть спинки	2	1
6	Кокетка	1	0
7	Отлетная деталь полочки	2	1
8	Рукав	2	1
9	Манжета	2	1
10	Верхний карман	2	1
11	Нижний карман	2	1
12	Планка верхнего кармана	2	1
13	Планка нижнего кармана	2	1
14	Воротник	2	1
15	Стойка воротника	2	1
16	Обтачка спинки	2	1
	Итого:	30	14

Таблица В141.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Куртка медицинская мужская 408-1К

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина спинки посередине, см	158-164 170-176 182-188	67,9 71,9 73,9	68,0 72,0 74,0	68,1 72,1 74,1	68,2 72,2 74,2	68,3 72,3 74,3	68,5 72,5 74,5	68,7 72,7 74,7	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	44,4	45,4	46,2	47,2	48,2	49,0	50,0	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164 170-176 182-188	69,0 73,0 75,0	69,6 73,6 75,6	70,2 74,2 76,2	70,7 74,7 76,7	71,4 75,4 77,4	72,1 76,1 78,1	72,8 76,8 78,8	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки) см	все роста	51,6	53,6	55,6	57,6	59,6	61,6	63,6	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164 170-176 182-188	21,1 23,1 24,1	21,3 23,3 24,3	21,5 23,5 24,5	21,9 23,9 24,9	22,0 24,0 25,0	22,1 24,1 25,1	22,3 24,3 25,3	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	20,3	20,8	21,2	21,7	22,4	23,0	23,7	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	19,2	19,7	20,2	20,7	21,2	21,7	22,2	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	11,0	11,0	11,0	12,0	12,0	12,0	12,0	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	17,0	17,0	17,0	17,9	17,9	18,9	18,9	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	17,7	17,7	17,7	17,9	17,9	18,1	18,1	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	51,6	52,4	53,2	54,0	54,8	55,6	57,4	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В141.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	158-164 170-176 182-188	69,1 73,1 75,1	69,5 73,5 75,5	70,0 74,0 76,0	70,2 74,2 76,2	70,4 74,4 76,4	70,6 74,6 76,6	70,8 74,8 76,8	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	51,0	51,8	52,6	53,4	54,2	55,0	55,8	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164 170-176 182-188	73,4 77,4 79,4	74,1 78,1 80,1	74,9 78,9 80,9	75,6 79,6 81,6	76,4 80,4 82,4	77,0 81,0 83,0	77,6 81,6 83,6	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	68,5	70,5	72,5	74,5	76,5	78,5	80,5	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки) см	все роста	65,6	67,6	69,6	71,6	73,6	75,6	77,6	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164 170-176 182-188	22,5 24,5 25,5	22,6 24,6 25,6	22,8 24,8 25,8	22,9 24,9 25,9	23,1 25,1 26,1	23,2 25,2 26,2	23,4 25,4 26,4	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	24,4	25,1	25,8	26,5	27,2	27,9	28,6	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	22,7	23,3	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	12,8	12,8	12,8	13,5	13,5	13,5	13,5	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,3	12,3	12,3	12,5	12,5	12,5	12,5	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	18,9	18,9	18,9	20,0	20,0	20,0	20,0	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана, см	все роста	18,1	18,8	18,8	19,0	19,0	19,0	19,0	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	58,2	59,0	60,0	60,8	61,6	62,4	63,2	(+/-)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 468 из 529

В142. Куртка медицинская мужская модель 409К.

Описание модели

Куртка медицинская мужская длиной ниже линии бёдер, прямого силуэта, умеренного объёма. Перед изделия короче спинки на 3,0 см, в боковых швах разрезы. Горловина V – образной формы, обработана на спинке обтачкой, а на передё – притачными планками шириной 2,8-3,0см.

Перед с отрезной кокеткой, в шов притачивания который входят концы планок горловины; с двумя наклонными рельефными швами выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с одним верхним накладным карманом фигурной формы, расположенным на левой стороне переда на 1,2см ниже шва притачивания кокетки и входящим боковым срезом в рельефный шов; с двумя нижними накладными карманами, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы, а нижние срезы – в подгибку низа. Верхние края карманов должны быть обработаны планками шириной 2,8-3,0см.

Спинка с притачной кокеткой, средним швом и двумя мягкими складками, заложенными в шве притачивания кокетки.

Рукава втачные, одношовные, длиной выше локтя.

По рельефам, швам притачивания кокеток и планок карманов и горловины переда, а также по швам настрачивания верхнего кармана должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 см и 0,7-0,8см от края или шва.

По разрезам, краям планок нижних карманов, горловине переда и спинки должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края

По линии входа верхнего накладного кармана должна быть проложена строчка на расстоянии 1,8-2,0см от края.

По низу изделия и низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

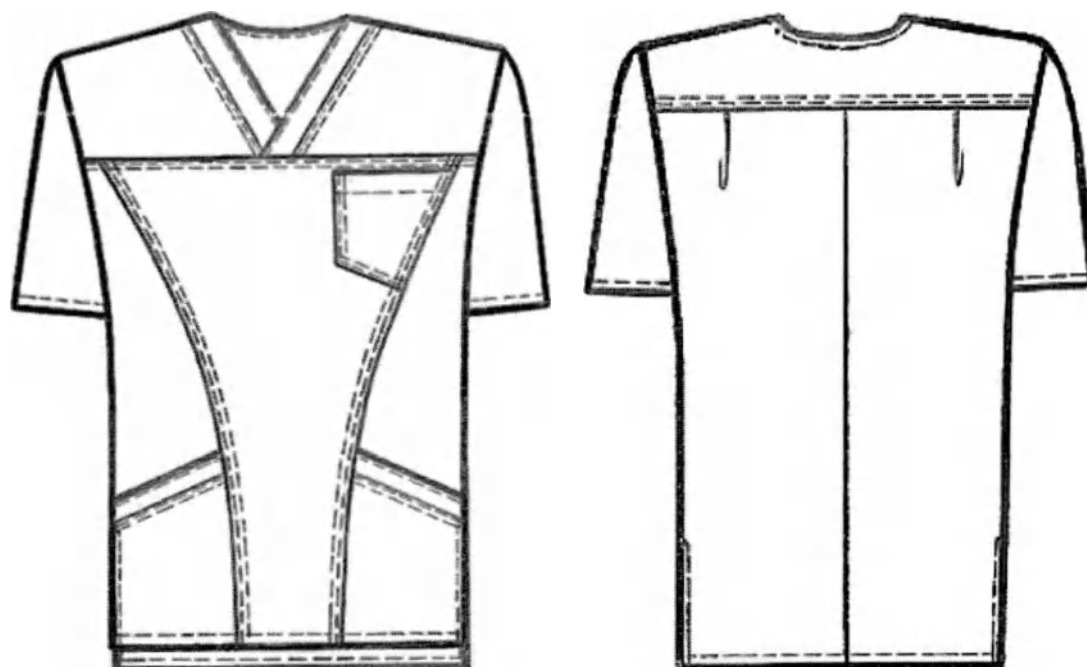


Рисунок В142– Куртка медицинская мужская модель 409К

Таблица В142.1 Спецификация деталей кроя Куртка медицинская мужская модель 409К

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Средняя часть переда	1	0
2	Бочок переда	2	1
3	Кокетка переда	2	1
4	Спинка	2	1
5	Кокетка спинки	1	0
6	Рукав	2	1
7	Верхний карман	1	0
8	Нижний карман	2	1
9	Планка нижнего кармана	2	1
10	Планка горловины переда	2	1
11	Обтачка горловины спинки	1	0
Итого		18	7

Таблица В142.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Куртка медицинская мужская 409К

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	72.8	73.0	73.1	73.2	73.4	73.7	73.8	(±)1.0
		170-176	76.8	77.0	77.1	77.2	77.4	77.7	77.8	
		182-188	80.8	81.0	81.1	81.2	81.4	81.7	81.8	

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-
2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	44,6	45,4	46,3	47,2	47,9	48,6	49,2	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164	70,0	70,8	71,6	72,5	73,2	73,9	74,5	(±)1,0
		170-176	74,0	74,8	75,6	76,5	77,2	77,9	78,5	
		182-188	78,0	78,8	79,6	80,5	81,2	81,9	82,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	67,5	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164	23,3	23,5	23,8	24,1	24,4	24,7	25,1	(±)0,5
		170-176	25,3	25,5	25,8	26,1	26,4	26,7	27,1	
		182-188	27,3	27,5	27,8	28,1	28,4	28,7	29,1	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	20,0	20,6	21,3	21,9	22,5	23,3	24,1	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	19,0	19,5	20,0	20,6	21,2	21,9	22,5	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	12,0	12,1	12,1	12,6	12,6	12,8	12,8	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	16,3	17,0	17,7	18,5	19,2	20,0	20,7	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	22,8	22,8	22,8	22,9	22,9	23,0	23,0	(+/-)0,3

Продолжение Таблицы В142.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	74,0	74,3	74,4	74,5	74,8	75,1	75,3	(±)1,0
		170-176	78,0	78,3	78,4	78,5	78,8	79,1	79,3	
		182-188	82,0	82,3	82,4	82,5	82,8	83,1	83,3	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	49,8	50,5	51,2	51,8	52,5	53,2	53,8	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164	75,2	75,9	76,7	77,4	78,1	78,8	79,5	(±)1,0
		170-176	79,2	79,9	80,7	81,4	82,1	82,8	83,5	
		182-188	83,2	83,9	84,7	85,4	86,1	86,8	87,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	69,5	71,5	73,5	75,5	77,5	79,4	81,2	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	75,8	77,6	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164	25,4	25,7	26,1	26,5	26,8	27,1	27,4	(±)0,5
		170-176	27,4	27,7	28,1	28,5	28,8	29,1	29,4	
		182-188	29,4	29,7	30,1	30,5	30,8	31,1	31,4	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	24,8	25,6	26,4	27,1	27,8	28,6	29,4	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	23,2	24,0	24,7	25,3	26,0	26,8	27,6	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	13,0	13,0	13,5	13,5	13,8	13,8	13,8	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	9,9	9,9	10,1	10,1	10,4	10,4	10,4	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	21,4	22,2	23,0	21,5	22,0	22,5	23,0	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	23,4	23,4	23,4	23,6	23,7	23,9	23,9	(+/-)0,3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 471 из 529

В143. Куртка медицинская мужская модель 411К.

Описание модели

Куртка медицинская мужская, комбинированная из тканей двух цветов, длиной ниже линии бедер, прямого силуэта, свободного покроя, с разрезами в боковых швах. Изделие без воротника с круглым вырезом горловины, обработанным обтачкой.

Перед состоит из двух частей, разделенных вставкой в виде прямого угла шириной 3,3-4,0 см (в зависимости от размера изделия), выходящей из правой проймы и заканчивающейся внизу изделия дальше линии середины переда. В левом плечевом шве должна быть обработана застежка на 3 кнопки, края которой обработаны притачными планками шириной 3,5 см. На передке должны быть обработаны три накладных кармана: один верхний-справа, под угловой вставкой, и два нижних, входящих задними срезами в боковые швы, а нижними в подгибку изделия. Левый карман передним срезом должен входить в шов притачивания угловой вставки.

Спинка со средним швом.

Рукава втачные, одношовные, короткие, длиной выше локтя.

Верхняя и левая части переда, спинка, левый рукав и левый нижний карман должны быть выполнены из основной ткани №1, правая нижняя часть переда, правый рукав, верхний и правый нижний карманы-из основной ткани №3, угловая вставка-из отделочной ткани.

По краям горловины, планок застежки, разрезов, швам притачивания угловой вставки и швам настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,0-0,2 см от края или шва.

По верхним краям карманов и низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,7-2,9 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,0-1,2 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом основных тканей №1 и №2 и с цветом отделочной ткани.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 170-176.

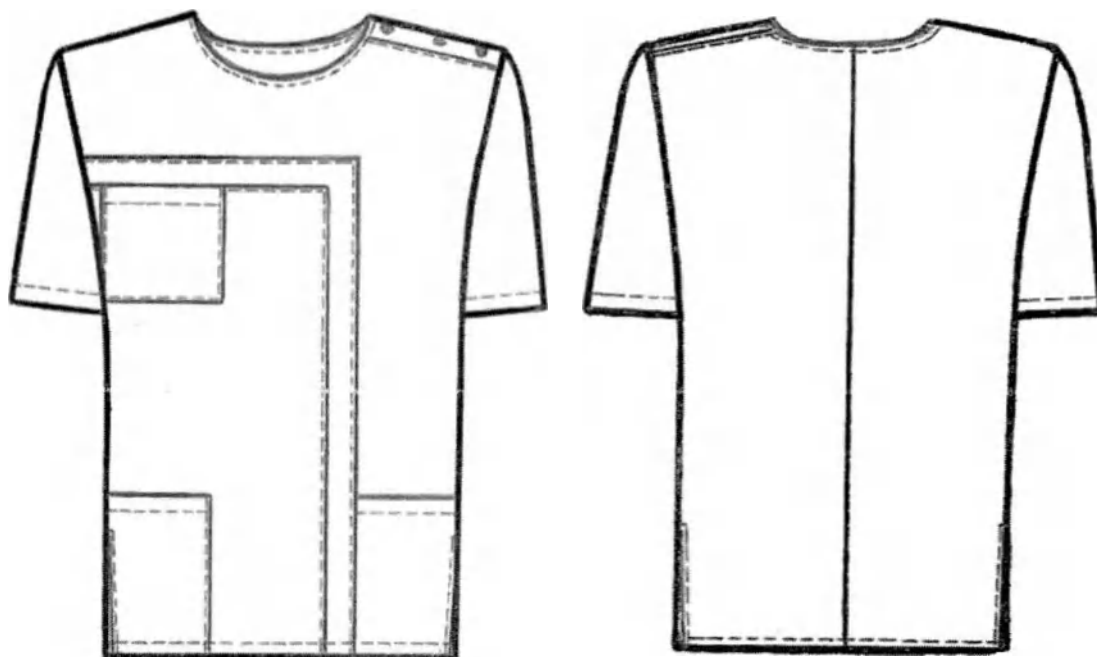


Рисунок В143– Куртка медицинская мужская модель 411К

Таблица В143.1 Спецификация деталей кроя Куртка медицинская мужская модель 411К

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань №1			
1	Верхняя и левая часть переда	1	0
2	Спинка	2	1
3	Левый рукав	1	0
4	Левый нижний карман	1	0
5	Верхняя планка застежки	1	0
6	Нижняя планка застежки	1	0
7	Обтачка горловины переда	1	0
8	Обтачка горловины спинки	1	0
Основная ткань №2			
9	Правая часть переда	1	0
10	Правый рукав	1	0
11	Верхний карман	1	0
12	Правый нижний карман	1	0
Отделочная ткань			
13	Вставка переда	1	0
Итого:		14	1

Таблица В143.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Куртка медицинская мужская 411К

№	Наименование измерения	Рост	Размер						Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

1	Длина спинки посередине, см	170-176	76.3	76.5	76.6	76.7	77.0	77.2	77.4	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	170-176	46.3	44.2	45.2	46.1	47.0	47.8	48.6	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	170-176	77.2	77.7	78.4	79.0	79.7	80.3	80.9	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	170-176	54.0	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0	66.0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	170-176	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0	63.0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	170-176	23.4	23.6	23.9	24.0	24.3	24.5	24.7	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	170-176	19.7	20.4	21.1	21.8	22.3	23.2	23.9	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	170-176	19.0	19.4	20.0	20.4	20.9	21.4	22.0	(+/-0.5)
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	170-176	12.8	12.8	12.8	13.8	13.8	13.8	14.3	(+/-0.3)
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	170-176	13.9	13.9	13.9	13.9	14.0	14.0	14.5	(+/-0.3)
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	170-176	16.5	17.4	17.8	18.0	18.3	18.9	19.4	(+/-0.3)
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	170-176	19.3	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.6	(+/-0.3)

Продолжение Таблицы В143.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	170-176	77.6	77.8	78.1	78.3	78.5	78.7	78.9	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	170-176	49.3	50.1	50.7	51.3	52.0	52.8	53.6	(+/-0.5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	170-176	81.5	82.1	82.7	83.3	83.8	84.3	84.8	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	170-176	68.0	70.0	72.0	74.0	76.0	78.0	80.0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	170-176	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	77.0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	170-176	25.1	25.3	25.8	26.2	26.5	27.0	27.4	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	170-176	24.6	25.4	26.3	26.9	27.7	28.4	29.1	(+/-0.5)
8	Ширина рукава внизу, см	170-176	22.4	23.2	24.0	24.6	25.1	26.0	26.5	(+/-0.5)
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	170-176	14.3	14.8	14.8	14.8	15.3	15.3	15.3	(+/-0.3)
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	170-176	14.5	15.0	15.0	15.0	15.5	15.5	15.5	(+/-0.3)
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	170-176	19.8	20.4	20.8	21.2	21.6	22.0	22.4	(+/-0.3)
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	170-176	19.7	19.8	19.9	20.0	20.1	20.2	20.3	(+/-0.3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 474 из 529

В144. Куртка медицинская мужская модель 412К.

Описание модели

Куртка медицинская мужская длиной ниже линии бедер, прямого силуэта, свободного покроя, с разрезами в боковых швах.

Перед с притачной кокеткой, с центральной застежкой на кокетке на 2 кнопки (края застежки должны быть обработаны притачными планками шириной 3,5 см; с двумя вертикальными рельефами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с одним верхним накладным карманом фигурной формы, настроенным с левой стороны переда под кокеткой; с двумя нижними накладными карманами фигурной формы, входящими задними срезами в боковые швы; с одним дополнительным накладным карманом, настроенным под правым нижним карманом на 3,0 см выше и на 5,0 см правее него, задним срезом также входящим в боковой шов. Низ переда должен быть обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Спинка с притачной кокеткой, с двумя вертикальными рельефами, выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с декоративной петлей шириной 0,8-0,9 см и длиной 5,0 см., вшитой посередине горловины в шов притачивания воротника. Низ спинки должен быть обработан широкой обтачкой.

Рукава втачные одношовные, короткие, длиной выше локтя. Низ рукавов обработан отложными манжетами шириной 4,0 см и прямоугольными декоративными патами шириной 2,5 см, пришитыми одним концом с изнаночной стороны рукавов посередине, а другим концом пристегивающимися к рукавам с помощью кнопок.

Воротник-стойка шириной 3 см, застегивающаяся на 1 кнопку

Внутренние части воротника, манжет, планок застежки, дополнительный карман, петля и обтачка низа спинки выполнены из отделочной принтованной ткани.

По кокеткам, рельефам, краям воротника, пат, планок застежки, манжет, декоративной петли, разрезов, низу спинки и швам настрачивая карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

На верхнем кармане должна быть проложена сквозная вертикальная строчка от верха до низа кармана на расстоянии 4,0 см от его переднего края.

По верхним краям основных карманов проложена строчка на расстоянии 3,0 см от края.

По верхнему краю дополнительного кармана и по низу переда проложена строчка на расстоянии 1,5 см от края.

По низу спинки должна быть проложена строчка на расстоянии 3,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,5 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом основной и отделочной тканей.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоцелевого использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;
Рост: 170-176.

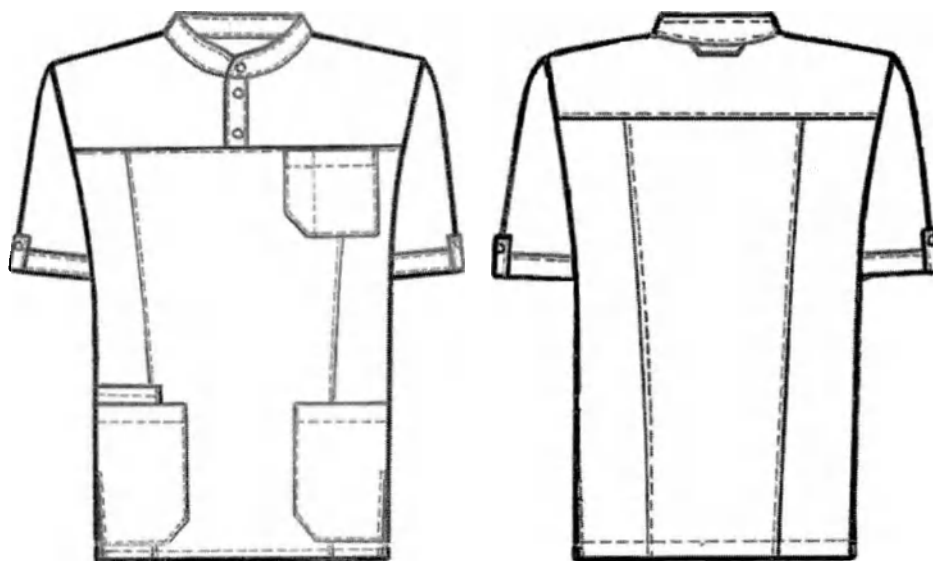


Рисунок В144– Куртка медицинская мужская модель 412К

Таблица В144.1 Спецификация деталей кроя Куртка медицинская мужская модель 412К

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Перед	1	0
2	Бочок переда	2	1
3	Спинка	1	0
4	Бочок спинки	2	1
5	Кокетка переда	2	1
6	Кокетка спинки	1	0
7	Рукав	2	1
8	Верхний карман	1	0
9	Нижний карман	2	1
10	Пата рукав	2	1
11	Деталь для крепления паты	2	1
12	Воротник	1	0
13	Планка застежки	2	1
Отделочная ткань			
14	Воротник	1	0
15	Планка застежки	2	1
16	Петля	1	0
17	Манжета	2	1
18	Дополнительный карман	1	0
19	Обтачка низа спинки	1	0

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

	Итого:	29	10
--	---------------	-----------	-----------

Таблица В144.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Куртка медицинская мужская 412К

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина спинки посередине, см	170-176	77,3	77,5	77,6	77,7	78,0	78,2	78,5	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	170-176	43,6	44,4	45,3	46,1	47,0	47,8	48,6	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	170-176	77,7	78,2	78,9	79,5	80,2	80,8	81,4	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	170-176	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	170-176	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	170-176	23,5	23,7	24,0	24,2	24,3	24,5	24,7	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	170-176	19,3	20,0	20,7	21,4	21,9	22,8	23,5	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	170-176	18,8	19,3	19,9	20,4	21,0	21,6	22,2	(+/-0,5)
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	170-176	13,0	13,0	13,0	13,0	13,8	13,8	13,8	(+/-0,3)
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	170-176	14,3	14,3	14,3	14,3	14,8	14,8	14,8	(+/-0,3)
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	170-176	18,0	18,3	18,8	19,4	20,1	21,0	21,5	(+/-0,3)
12	Глубина нижнего кармана, см	170-176	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,1	20,1	(+/-0,3)
13	Длина воротника по отлету, см	170-176	46,3	47,3	48,3	49,5	50,7	52,1	52,7	(+/-0,5)

Продолжение Таблицы В144.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	170-176	78,6	78,7	79,1	79,3	79,5	79,7	79,9	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	170-176	49,3	50,1	50,7	51,3	52,0	52,8	53,6	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	170-176	82,0	82,6	83,2	83,8	84,3	84,8	85,3	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	170-176	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	170-176	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	170-176	25,1	25,3	25,8	26,2	26,5	27,0	27,4	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	170-176	24,2	25,0	25,9	26,5	27,3	28,0	28,7	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	170-176	22,7	23,4	24,0	24,6	25,1	26,0	26,5	(+/-0,5)
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	170-176	13,8	14,3	14,3	14,3	14,8	14,8	14,8	(+/-0,3)
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	170-176	14,8	15,4	15,4	15,4	15,7	15,7	15,7	(+/-0,3)
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	170-176	22,6	22,9	24,3	24,8	25,4	23,8	23,8	(+/-0,3)
12	Глубина нижнего кармана, см	170-176	20,4	20,4	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	(+/-0,3)
13	Длина воротника по отлету, см	170-176	53,7	54,6	55,5	56,4	57,2	58,2	59,2	(+/-0,5)

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 477 из 529

В145. Куртка медицинская мужская модель 413К.

Описание модели

Куртка медицинская мужская длиной ниже линии бедер, полуприлегающего силуэта. Изделие с притачной кокеткой- на спинке выше уровня лопаток, а спереди шириной 4,0 см; с разрезами в боковых швах.

Перед с центральной бортовой застежкой на 6 кнопок; с одним верхним фигурным накладным карманом на левой полочке, фиксирующимся сверху к полочке на кнопку; с вертикальными рельефными швами, выходящими из швов притачивания кокетки близко к проймам и доходящими до низа; с двумя нижними карманами в рельефных швах. Край борта левой полочки должен быть подогнут и застрочен на 1,5 см, образуя складку, под которую притачана планка шириной 3,0 см, образуя полусупатную застежку. Край борта правой полочки обработан притачной планкой шириной 3,0 см.

Спинка с вертикальными рельефными швами из шва притачивания кокетки и доходящими до низа.

Рукава втачные одношовные, короткие.

Параллельно нижним краям рукавов (на расстоянии 0,1-0,2 см и 0,7-0,8 см от края) должны быть застрочены двумя строчками защипы, имитирующие отложные манжеты шириной 3,5 см.

Воротник-стояче отложной, на отрезной стойке.

Планки застежки и стойка воротника выполнены из отделочной ткани с принтом.

На краях входов в карманы и между кнопками по краю левого борта должны быть установлены закрепки на спецмашине.

По кокетке, рельефам полочек и спинки, низу рукавов, краю воротника и швам настрачивания верхнего кармана должны быть проложены строчки на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см от края или шва.

По шву притачивания правой планки застежки, швам соединения воротника со стойкой и втачивания стойки в горловину, а также по краям разрезов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

На верхнем кармане должны быть проложены 2 горизонтальные строчки с расстоянием 0,6-0,7 см, фиксирующие край обтачки верхнего среза кармана.

По низу изделия проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,1-1,2 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 170-176.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 478 из 529

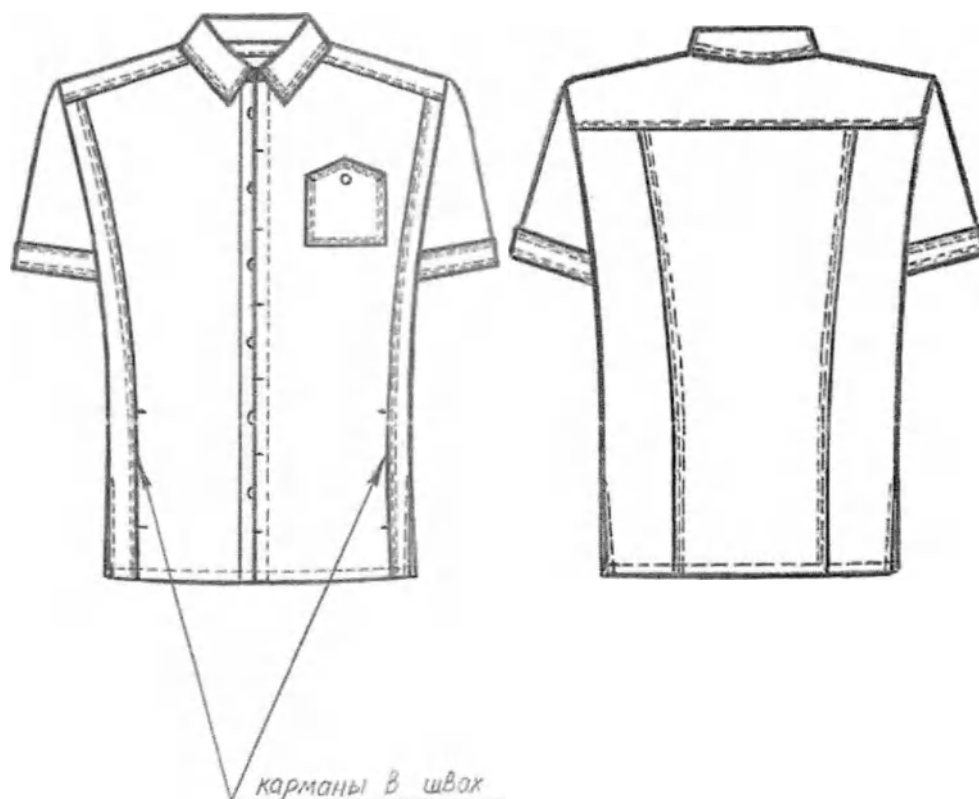


Рисунок В145– Куртка медицинская мужская модель 413К

Таблица В145.1 Спецификация деталей кроя
Куртка медицинская мужская модель 413К

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Правая полочка	1	0
2	Левая полочка	1	0
3	Бочок полочки	2	1
4	Спинка	1	0
5	Бочок спинки	2	1
6	Кокетка	1	0
7	Рукав	2	1
8	Верхний карман	1	0
9	Мешковина нижнего кармана	4	2
10	Воротник	2	1
11	Обтачка верхнего кармана	1	0
	Отделочная ткань		
12	Правая планка застежки	1	0
13	Левая планка застежки	1	0
14	Стойка воротника	2	1
	Прокладочный материал		
15	Правая планка застежки	1	0

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

16	Воротник	1	0
17	Стойка воротника	1	0
18	Обтачка верхнего кармана	1	0
	Итого:	26	7

Таблица В145.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Куртка медицинская мужская 413К

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина спинки посередине, см	170-176	74,3	74,5	74,6	74,7	75,0	75,2	75,5	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	170-176	40,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	170-176	74,5	75,0	75,7	76,3	77,0	77,6	78,2	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	170-176	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	170-176	46,0	48,0	50,0	52,2	54,3	56,4	58,5	(+/-1)
6	Длина рукава, см	170-176	22,7	23,0	23,2	23,4	23,6	23,8	24,1	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	170-176	17,9	18,7	19,5	20,2	21,0	21,7	22,3	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	170-176	17,4	18,1	18,8	19,5	20,2	20,9	21,5	(+/-0,5)
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	170-176	11,3	11,5	11,5	12,0	12,0	12,2	13,0	(+/-0,3)
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	170-176	13,0	13,0	13,0	13,1	13,1	13,1	13,5	(+/-0,3)
11	Длина входа в карман, см	170-176	14,8	14,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	(+/-0,5)
12	Длина воротника по отлету, см	170-176	47,5	48,4	49,3	50,2	51,1	52,0	52,9	(+/-0,5)

Продолжение Таблицы В145.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	170-176	75,6	75,7	76,1	76,3	76,5	76,7	76,9	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	170-176	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	170-176	78,8	79,4	80,0	80,6	81,1	81,6	82,1	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	170-176	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	170-176	60,6	62,8	65,0	67,2	69,4	71,6	73,8	(+/-1)
6	Длина рукава, см	170-176	24,3	24,5	24,8	25,0	25,2	25,5	25,7	(+/-1)
7	Ширина рукава под проймой, см	170-176	23,0	23,7	24,4	25,1	25,8	26,5	27,2	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	170-176	22,2	22,8	23,5	24,2	24,8	25,5	26,2	(+/-0,5)
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	170-176	13,0	13,0	13,5	13,5	14,0	14,0	14,0	(+/-0,3)
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	170-176	13,5	13,5	14,0	14,0	14,0	14,2	14,2	(+/-0,3)
11	Длина входа в карман, см	170-176	15,8	16,5	16,5	16,5	17,0	17,0	17,0	(+/-0,5)
12	Длина воротника по отлету, см	170-176	53,8	54,7	55,6	56,5	57,4	58,3	59,2	(+/-0,5)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 480 из 529

В146. Куртка медицинская мужская модель 414К.

Описание модели

Куртка медицинская мужская из гладкокрашеной ткани, длиной ниже линии бедер, прямого силуэта, умеренного объема, с разрезами в боковых швах. Верхняя часть переда оформлена притачными лампасами шириной 3,4-3,6 см, выходящими из горловины и доходящими до низа рукавов.

Перед с отрезной кокеткой, на которой обработана супатная застежка на 2 кнопки, смещенная от центра вправо на 2,0 см. В шве притачивания кокетки с левой стороны должен быть обработан карман, на нижней части переда-2 боковых кармана фигурной формы, задние срезы которых входят в боковые швы.

Спинка со средним швом.

Рукава втачные, короткие, состоящие из передних и задних частей, разделенных лампасами.

Воротник-стойка шириной 2,6-2,8 см, застегивающаяся на одну кнопку.

Лампасы и мешковины верхнего кармана должны быть выполнены из отделочной гладкокрашеной ткани.

В передних углах нижних карманов и на боковых разрезах должны быть установлены на спецмашине по одной закрепке, а на краях входа верхнего кармана-по 2 закрепки с каждой стороны с расстоянием между ними 0,7-0,8 см.

По краям воротника, застежки и разрезов, по швам притачивания лампасов, кокеток и настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

Вдоль застежки по левой кокетке должна быть проложена строчка на расстоянии 3,5-3,6 см от края.

По верхним краям карманов и низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 3,3-3,5 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны использоваться металлические кнопки диаметром 1,1-1,3 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом основной и отделочной тканей. Для выполнения закрепок должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом отделочной ткани.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;

Рост: 170-176.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

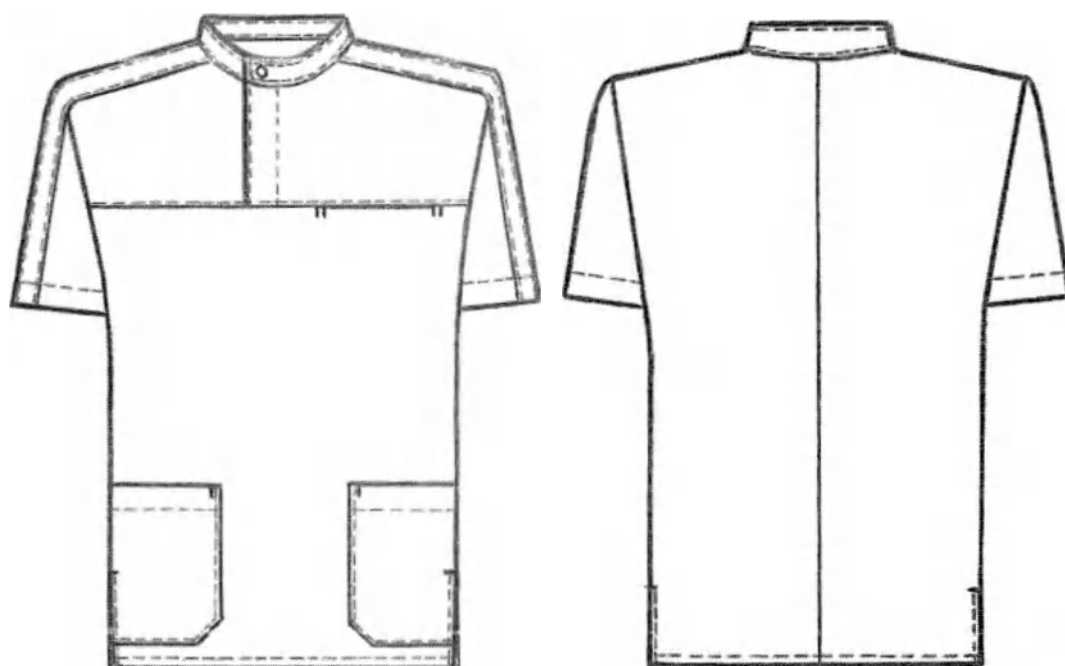


Рисунок В146– Куртка медицинская мужская модель 414К

Таблица В146.1 Спецификация деталей кроя Куртка медицинская мужская модель 414К

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Перед	1	0
2	Спинка	2	1
3	Правая кокетка переда	1	0
4	Левая кокетка переда	1	0
5	Воротник	2	1
6	Передняя часть рукава	2	1
7	Задняя часть рукава	2	1
8	Нижний карман	2	1
9	Планка супатной застежки	1	0
Отделочная ткань			
10	Лампас рукава	2	1
11	Мешковина верхнего кармана	2	1
Прокладочный материал			
12	Воротник	1	0
	Итого:	19	7

Таблица В146.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Куртка медицинская мужская 414К

№	Наименование измерения	Рост	Размер					Допуск, см
			44	46	48	50	52	
1	Длина спинки посередине, см	170-176	74,8	75,0	75,1	75,2	75,5	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	170-176	43,8	44,6	45,4	46,2	47,0	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа (без лампаса), см	170-176	73,8	74,3	75,0	75,6	76,3	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	170-176	54,3	56,3	58,3	60,3	62,3	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	170-176	51,3	53,3	55,3	57,3	59,3	(+/-1)
6	Длина рукава, см	170-176	23,6	23,8	24,0	24,2	24,5	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	170-176	19,7	20,4	21,0	21,7	22,3	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	170-176	19,2	19,8	20,4	20,9	21,4	(+/-0,5)
9	Длина входа верхнего кармана, см	170-176	12,3	12,3	12,3	12,3	13,3	(+/-0,3)
10	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	170-176	18,0	18,3	19,0	19,5	20,3	(+/-0,3)
11	Глубина нижнего кармана, см	170-176	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	(+/-0,3)
12	Длина воротника по отлету, см	170-176	52,5	53,5	54,5	55,5	56,5	(+/-0,5)

Продолжение Таблицы В146.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер				Допуск, см
			54	56	58	60	
1	Длина спинки посередине, см	170-176	75,7	76,0	76,1	76,2	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	170-176	47,8	48,6	49,4	50,2	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа (без лампаса), см	170-176	76,9	77,5	78,1	78,7	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	170-176	64,3	66,3	68,3	70,3	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	170-176	61,3	63,3	65,3	67,3	(+/-1)
6	Длина рукава, см	170-176	24,7	25,0	25,2	25,4	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	170-176	23,0	23,7	24,4	25,1	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	170-176	22,0	22,6	23,1	23,6	(+/-0,5)
9	Длина входа верхнего кармана, см	170-176	13,3	13,3	13,3	14,3	(+/-0,3)
10	Ширина нижнего кармана по линии входа, см, см	170-176	21,2	21,7	22,5	23,0	(+/-0,3)
11	Глубина нижнего кармана, см	170-176	20,0	20,1	20,3	20,3	(+/-0,3)
12	Длина воротника по отлету, см	170-176	57,5	58,5	59,5	60,6	(+/-0,5)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В147. Куртка медицинская мужская модель 415К.

Описание модели

Куртка медицинская мужская из гладкокрашеной ткани, длиной ниже линии бедер, прямого силуэта, умеренного объема, с застежкой в левом плечевом шве на 3 кнопки. Края застежки должны быть обработаны притачными планками шириной 3,4-3,5 см. Перед изделия короче спинки на 3,0 см, в боковых швах должны быть обработаны разрезы. Изделие без воротника, с круглым вырезом горловины, обработанным обтачкой.

Перед с горизонтальной вставкой шириной 12,0-13,0 см (в зависимости от размера). Верхний шов притачивания вставки проходит выше линии глубины проймы. В нем с левой стороны должен быть обработан карман. Нижний шов притачивания вставки проходит ниже линии глубины проймы. В нижней части переда должны быть обработаны 2 боковых накладных кармана фигурной формы, вшитые задними срезами в боковые швы, а также 1 дополнительный карман внутри правого кармана. Дополнительный карман уже основного на 5,4-5,5 см, а его верхний край выступает на 1,3-1,5 см над основным.

Спинка с притачной кокеткой, средним швом и двумя мягкими складками, заложенными в шве притачивания кокетки.

Рукава втачные, одношовные, короткие (длиной выше локтя).

Вставка переда и дополнительный карман должны быть выполнены из отделочной гладкокрашеной ткани.

По краям входов верхнего и нижних карманов должны быть установленные на спецмашине закрепки.

По краям горловины, планок, разрезов, по швам притачивания вставки переда и планок застежки, а также швам настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По верхним краям карманов и низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,9-3,1 см от края.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см.

В качестве фурнитуры должны использоваться кнопки диаметром 1,1-1,3 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом основной и отделочной тканей. Для выполнения закрепок должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом отделочной ткани.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

Рост: 170-176.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 484 из 529

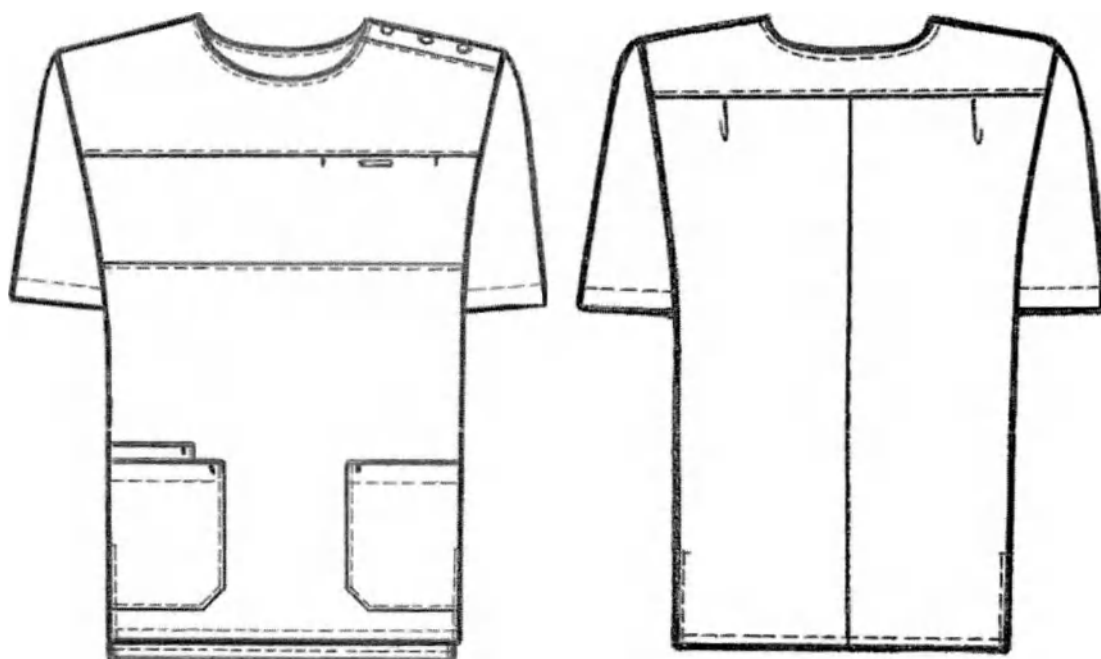


Рисунок В147– Куртка медицинская мужская модель 415К

Таблица В147.1 Спецификация деталей кроя Куртка медицинская мужская модель 415К

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.крой	Кол-во зеркально
	Основная ткань		
1	Нижняя часть переда	1	0
2	Кокетка переда	1	0
3	Спинка	2	1
4	Кокетка спинки	1	0
5	Рукав	2	1
6	Нижний карман	2	1
7	Верхняя планка застежки	1	0
8	Нижняя планка застежки	1	0
9	Обтачка горловины переда	1	0
10	Обтачка горловины спинки	1	0
	Отделочная ткань		
9	Вставка переда	1	0
10	Мешковина верхнего кармана	2	1
11	Дополнительный нижний карман	1	0
	Итого:	17	4

Таблица В147.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Куртка медицинская мужская 415К

№	Наименование измерения	Рост	Размер					Допуск, см
			44	46	48	50	52	
1	Длина спинки посередине, см	170-176	77,3	77,5	77,6	77,7	78,0	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	170-176	44,1	45,0	46,0	46,9	47,8	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа (с правой стороны), см	170-176	75,0	75,5	76,2	76,8	77,5	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	170-176	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	170-176	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	170-176	24,6	24,8	25,1	25,2	25,5	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	170-176	19,8	20,5	21,2	21,9	22,4	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	170-176	18,8	19,4	20,0	20,6	21,2	(+/-0,5)
9	Длина входа верхнего кармана, см	170-176	12,2	12,2	12,2	12,2	13,1	(+/-0,3)
10	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	170-176	18,2	18,2	19,2	19,6	20,3	(+/-0,3)
11	Глубина нижнего кармана, см	170-176	20,1	20,1	20,1	20,1	20,2	(+/-0,3)

Продолжение Таблицы В147.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер					Допуск, см
			54	56	58	60	62	
1	Длина спинки посередине, см	170-176	78,2	78,4	78,6	78,8	79,1	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	170-176	48,6	49,4	50,1	50,9	51,5	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа (с правой стороны), см	170-176	78,1	78,7	79,3	79,9	80,5	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	170-176	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	170-176	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	(+/-1)
6	Длина рукава, см	170-176	25,7	25,9	26,3	26,5	27,0	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	170-176	23,3	24,0	24,7	25,5	26,4	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	170-176	21,8	22,4	23,0	23,6	24,2	(+/-0,5)
9	Длина входа верхнего кармана, см	170-176	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	(+/-0,3)
10	Ширина нижнего кармана по линии входа, см, см	170-176	21,3	21,8	22,8	23,0	24,2	(+/-0,3)
11	Глубина нижнего кармана, см	170-176	20,2	20,2	20,5	20,5	20,5	(+/-0,3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 486 из 529

В148. Куртка медицинская мужская модель 416К.

Описание модели

Куртка медицинская мужская из белой или гладкокрашеной эластичной ткани, длиной ниже линии бедер, прямого силуэта, умеренного объема, с карманами и разрезами в боковых швах. По краям входов в карманы должны быть установленные на спецмашине закрепки. Горловина V-образной формы, обработана на спинке широкой обтачкой, а попереду-притачными планками шириной 2,7-2,9 см. Перед с одним верхним накладным карманом слева, состоящим из двух отделений: основной карман прямоугольной формы; дополнительный карман шириной 2,9-3,1 см фигурной формы, короче основного сверху на 2,5 см. Над дополнительным карманом, параллельно входу, должна быть настрочена декоративная тесьма шириной 1,0-1,1 см, длиной 2,9-3,1 см. В нижнем углу кармана должна быть вшита шлевка размером 1,0*1,0 см с продетой в нее металлической фурнитурой размером 1,4*1,4 см. На заднем углу верхнего кармана должны быть установленные на спецмашине 2 вертикальные закрепки.

Спинка с отрезной кокеткой, с декоративной петлей из тесьмы шириной 1,0-1,1 см, длиной 5,5-6,0 см., вшитой посередине спинки в шов притачивания кокетки. Рукава втачные, одношовные, короткие. Посередине левого рукава, на 2,5-3,0 см выше подгибки, должен быть настрочен декоративный карман фигурной формы. Вподгибку правого рукава посередине должен быть вшит отрезок декоративной тесьмы шириной 1,0-1,1 см, длиной 1,5-1,7 см. По краям входа в карман должны быть установленные на спецмашине закрепки. По горловине, краям разрезов, швам притачивания планок горловины и кокетки спинки, швам настрачивания карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва. Обтачка горловины спинки должна быть настрочена по контуру на кокетку. По переду вдоль линий входов в боковые карманы должна быть проложена строчка на расстоянии 0,7-0,9 см от края. Мешковины боковых карманов должны быть настрочены по контуру сквозной строчкой на перед. По верхним краям карманов, низу рукавов и низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,4-1,6 см от края. Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани. Для изготовления закрепок должны использоваться нитки контрастного цвета.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 487 из 529

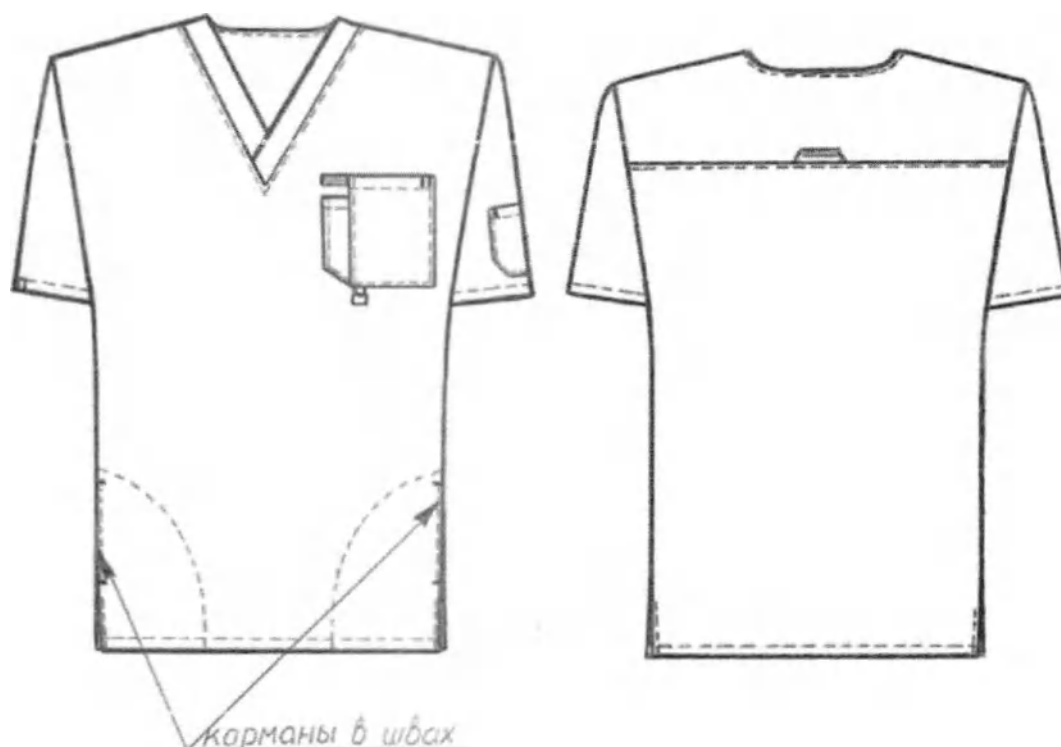


Рисунок В148– Куртка медицинская мужская модель 416К

Таблица В148.1 Спецификация деталей кроя Куртка медицинская мужская модель 416К

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Перед	1	0
2	Спинка	1	0
3	Кокетка спинки	1	0
4	Рукав	2	1
5	Верхний карман	1	0
6	Дополнительный верхний карман	1	0
7	Карман рукава	1	0
8	Мешковина нижнего кармана	4	2
9	Планка горловины переда	2	1
10	Шлевка	1	0
11	Обтачка горловины спинки	1	0
	Итого:	16	4

Таблица В148.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Куртка медицинская мужская 416К

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	69,0	69,2	69,3	69,5	69,7	70,0	70,3	(±1)
		170-176	71,0	71,2	71,3	71,5	71,7	72,0	72,3	
		182-188	75,0	75,2	75,3	75,5	75,7	76,0	76,3	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	43,0	44,0	44,8	45,8	46,7	47,7	48,6	(+/-1)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164 170-176 182-188	69,6 71,6 75,6	70,1 72,1 76,1	70,7 72,7 76,7	71,6 73,6 77,6	72,1 74,1 78,1	72,9 74,9 78,9	73,5 75,5 79,5	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	(+/-1)
6	Длина рукава, см	158-164 170-176 182-188	21,4 22,4 24,4	21,7 22,7 24,7	22,0 23,0 25,0	22,2 23,2 25,2	22,5 23,5 25,5	22,7 23,7 25,7	23,0 24,0 26,0	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	19,3	20,1	20,7	21,4	22,1	22,9	23,7	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	18,5	19,1	19,8	20,5	21,3	22,0	22,6	(+/-0,5)
9	Ширина верхнего кармана посередине, см	все роста	13,0	13,5	13,5	14,0	14,0	14,0	14,5	(+/-0,3)
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	все роста	13,4	13,8	13,8	14,0	14,0	14,0	14,3	(+/-0,3)
11	Длина входа нижнего кармана, см	все роста	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	(+/-0,3)

Продолжение Таблицы В148.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	158-164 170-176 182-188	70,4 72,4 76,4	70,6 72,6 76,6	70,7 72,7 76,7	70,9 72,9 76,9	71,2 73,2 77,2	71,4 73,4 77,4	71,7 73,7 77,7	(+/-1)
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	49,5	50,2	50,9	51,5	52,2	52,9	53,6	(+/-0,5)
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164 170-176 182-188	74,3 76,3 80,3	75,0 77,0 81,0	75,8 77,8 81,8	76,6 78,6 82,6	77,1 79,1 83,1	77,9 79,9 83,9	78,7 80,7 84,7	(+/-1)
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	66,5	68,5	70,5	72,5	74,5	76,5	78,5	(+/-1)
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	64,5	66,5	68,5	70,5	72,5	74,5	76,5	(+/-1)
6	Длина рукава, см	158-164 170-176 182-188	23,4 24,4 26,4	23,7 24,7 26,7	24,1 25,1 27,1	24,4 25,4 27,4	24,7 25,7 27,7	25,2 26,2 28,2	25,7 26,7 28,7	(+/-0,5)
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	24,5	25,3	26,0	26,7	27,4	28,2	29,0	(+/-0,5)
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	23,3	24,0	24,6	25,3	26,0	26,6	27,3	(+/-0,5)
9	Ширина верхнего кармана посередине, см	все роста	14,5	14,5	14,5	15,0	15,0	15,0	15,0	(+/-0,3)
10	Глубина верхнего кармана посередине, см	все роста	14,3	14,3	14,3	14,5	14,5	14,5	14,5	(+/-0,3)
11	Длина входа нижнего кармана, см	все роста	15,5	15,5	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	(+/-0,3)

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В149. Брюки медицинские мужские модель 505.

Описание модели

Брюки медицинские мужские прямого силуэта, слегка зауженные книзу, умеренного объема.

Верхний срез брюк должен быть обработан притачным поясом шириной 3,4-3,6 см.

Пояс брюк должен быть отстрочен по всей длине на 5-игольной спецмашине цепного стежка пятью параллельными строчками с расстоянием между ними 0,6-0,7мм.

По низу брюк должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

Для изготовления изделия используются нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

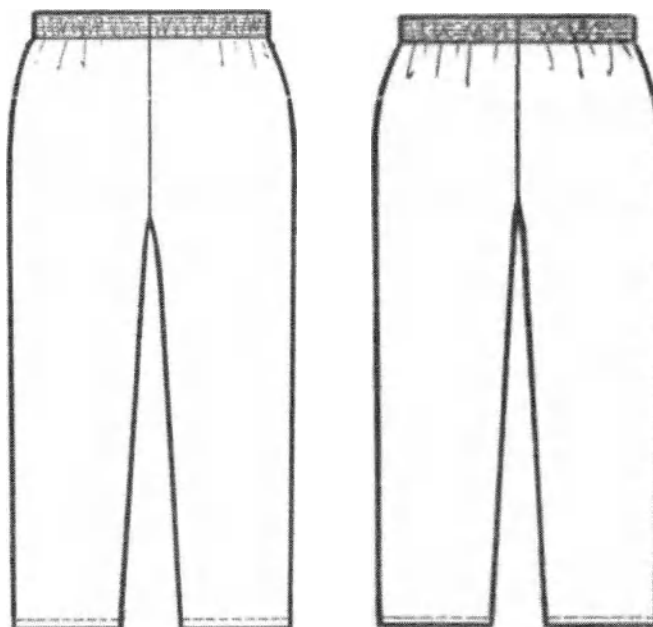


Рисунок В149– Брюки медицинские мужские модель 505

Таблица В149.1 Спецификация деталей кроя Брюки медицинские мужские модель 505

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Передняя половинка	2	1
2	Задняя половинка	2	1
3	Пояс	2	1
Итого		6	3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Таблица В149.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Брюки медицинские мужские 505

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина по боковому шву, см	158-164	100,3	100,5	100,6	100,8	101,1	101,4	101,6	(±)1,0
		170-176	107,3	107,5	107,6	107,8	108,1	108,4	108,6	
		182-188	114,3	114,5	114,6	114,8	115,1	115,4	115,6	
2	Длина по шаговому шву, см	158-164	72,9	72,7	72,5	72,2	72,0	72,0	71,8	(±)1,0
		170-176	79,9	79,7	79,5	79,2	79,0	79,0	78,8	
		182-188	86,9	86,7	86,5	86,2	86,0	86,0	85,8	
3	Ширина на уровне талии, см	все роста	49,2	51,0	52,8	54,6	56,5	58,3	60,0	(±)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	33,2	34,2	35,2	36,2	37,2	38,2	39,2	(±)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	22,0	22,4	22,8	23,2	23,5	23,8	24,2	(±)0,5

Продолжение Таблицы В149.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	158-164	101,8	101,9	102,1	102,2	102,3	102,4	102,5	(±)1,0
		170-176	108,8	108,9	109,1	109,2	109,3	109,4	109,5	
		182-188	115,8	115,9	116,1	116,2	116,3	116,4	116,5	
2	Длина по шаговому шву, см	158-164	71,5	71,2	70,9	70,7	70,5	69,6	69,5	(±)1,0
		170-176	78,5	78,2	77,9	77,7	77,5	76,6	76,5	
		182-188	85,5	85,2	84,9	84,7	84,5	83,6	83,5	
3	Ширина на уровне талии, см	все роста	61,5	63,5	65,3	67,0	68,8	71,0	73,0	(±)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	40,2	41,2	42,0	42,8	43,6	44,4	45,2	(±)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	24,5	24,9	25,3	25,6	25,9	26,3	26,6	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 491 из 529

В150. Брюки медицинские мужские модель 506.

Описание модели

Брюки медицинские мужские прямого силуэта, слегка зауженные книзу, умеренного объема.

Верхний срез брюк должен быть обработан притачным поясом шириной 3,4-3,6 см.

Передняя половина брюк с двумя защипами – «стрелками» глубиной 0,1 – 0,2 см, застроченными по линиям сгибов

Пояс брюк должен быть отстрочен по всей длине на 5-игольной спецмашине цепного стежка пятью параллельными строчками с расстоянием между ними 0,6-0,7мм.

По низу брюк должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

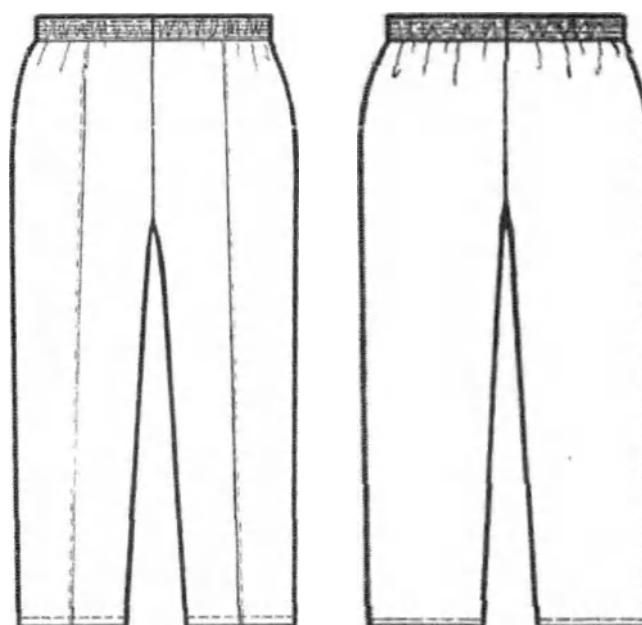


Рисунок В150– Брюки медицинские мужские модель 506

Таблица В150.1 Спецификация деталей кроя Брюки медицинские мужские модель 506

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Передняя половинка	2	1
2	Задняя половинка	2	1
3	Пояс	2	1
Итого		6	3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 492 из 529

Таблица В150.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Брюки медицинские мужские 506

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина по боковому шву, см	158-164	100.0	100.2	100.3	100.5	100.8	101.1	101.3	(±)1.0
		170-176	107.0	107.2	107.3	107.5	107.8	108.1	108.3	
		182-188	114.0	114.2	114.3	114.5	114.8	115.1	115.3	
2	Длина по шаговому шву, см	158-164	73.2	73.0	72.8	72.5	72.3	72.3	72.1	(±)1.0
		170-176	80.2	80.0	79.8	79.5	79.3	79.3	79.1	
		182-188	87.2	87.0	86.8	86.5	86.3	86.3	86.1	
3	Ширина на уровне талии, см	все роста	48.9	50.7	52.5	54.3	56.2	58.0	59.7	(±)1.0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	32.9	33.9	34.9	35.9	36.9	37.9	38.9	(±)0.5
5	Ширина внизу, см	все роста	21.7	22.1	22.5	22.9	23.2	23.5	23.9	(±)0.5

Продолжение Таблицы В150.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	158-164	101.5	101.6	101.8	101.9	102.0	102.1	102.2	(±)1.0
		170-176	108.5	108.6	108.8	108.9	109.0	109.1	109.2	
		182-188	115.5	115.6	115.8	115.9	116.0	116.1	116.2	
2	Длина по шаговому шву, см	158-164	71.8	71.5	71.2	71.0	70.8	69.9	69.8	(±)1.0
		170-176	78.8	78.5	78.2	78.0	77.8	76.9	76.8	
		182-188	85.8	85.5	85.2	85.0	84.8	83.9	83.8	
3	Ширина на уровне талии, см	все роста	61.2	63.2	65.0	66.7	68.5	70.7	72.7	(±)1.0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	39.9	40.9	41.7	42.5	43.3	44.1	44.9	(±)0.5
5	Ширина внизу, см	все роста	24.2	24.6	25.0	25.3	25.6	26.0	26.3	(±)0.5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 493 из 529

В151. Брюки медицинские мужские модель 507.

Описание модели

Брюки медицинские мужские прямого силуэта, слегка зауженные книзу, умеренного объема.

Передняя половина брюк с притачным поясом шириной 3,4 – 3,6 см, застегивающимся спереди на одну обметанную петлю и одну пуговицу; с застежкой в среднем шве на молнию-застежку, с двумя мягкими складками; с косыми подрезами, выходящими из швов притачивания пояса и заканчивающимися в боковых швах; с карманами в швах подрезов.

Задняя половина брюк с притачным поясом шириной 3,4 – 3,6 см.

Вдоль застежки по левой половинке брюк должна быть проложена строчка на расстоянии 1,8 – 2,0 см от края.

По среднему шву, по краям пояса передней половины брюк и швам его притачивания должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1 – 0,2 см от края или шва.

По линиям входа в карманы должна быть проложена строчка на расстоянии 0,6 – 0,7 см от края.

Пояс задней половины брюк должен быть отстрочен на 5-игольной спецмашине цепного стежка пятью параллельными строчками с расстоянием между ними 0,6-0,7см.

По низу брюк должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы пластиковая молния-застежка и пластиковая пуговица диаметром 1,7 – 1,9 мм.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.



Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023. ред.2

Страница 494 из 529

Рисунок В151– Брюки медицинские мужские модель 507

Таблица В151.1 Спецификация деталей кроя Брюки медицинские мужские модель 507

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Передняя половинка	2	1
2	Задняя половинка	2	1
3	Бочок передней половинки с мешковиной	2	1
4	Мешковина кармана	2	1
5	Задний пояс	1	0
6	Левый передний пояс	1	0
7	Правый передний пояс	1	0
8	Откосок	1	0
9	Обтачка под застежку	1	0
Итого		13	4

Таблица В151.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Брюки медицинские мужские 507

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина по боковому шву, см	158-164	100.3	100.5	100.6	100.8	101.1	101.4	101.6	(±)1.0
		170-176	107.3	107.5	107.6	107.8	108.1	108.4	108.6	
		182-188	114.3	114.5	114.6	114.8	115.1	115.4	115.6	
2	Длина по шаговому шву, см	158-164	72.9	72.7	72.5	72.2	72.0	72.0	71.8	(±)1.0
		170-176	79.9	79.7	79.5	79.2	79.0	79.0	78.8	
		182-188	86.9	86.7	86.5	86.2	86.0	86.0	85.8	
3	Ширина на уровне талии, см	все роста	43.2	45.0	46.8	48.6	50.5	52.3	54.0	(±)1.0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	33.2	34.2	35.2	36.2	37.2	38.2	39.2	(±)0.5
5	Ширина внизу, см	все роста	22.0	22.4	22.8	23.2	23.5	23.8	24.2	(±)0.5

Продолжение Таблицы В151.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	158-164	101.8	101.9	102.1	102.2	102.3	102.4	102.5	(±)1.0
		170-176	108.8	108.9	109.1	109.2	109.3	109.4	109.5	
		182-188	115.8	115.9	116.1	116.2	116.3	116.4	116.5	
2	Длина по шаговому шву, см	158-164	71.5	71.2	70.9	70.7	70.5	69.6	69.5	(±)1.0
		170-176	78.5	78.2	77.9	77.7	77.5	76.6	76.5	
		182-188	85.5	85.2	84.9	84.7	84.5	83.6	83.5	
3	Ширина на уровне талии, см	все роста	55.5	57.5	59.3	61.0	62.8	65.0	67.0	(±)1.0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	40.2	41.2	42.0	42.8	43.6	44.4	45.2	(±)0.5
5	Ширина внизу, см	все роста	24.5	24.9	25.3	25.6	25.9	26.3	26.6	(±)0.5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 495 из 529

В152. Брюки медицинские мужские модель 522.

Описание модели

Брюки медицинские мужские прямого силуэта, умеренного объема.

Верхний срез брюк должен быть обработан притачным поясом шириной 3,4-3,6 см, состоящим из двух частей – передней и задней. Задняя часть пояса должна заходить за боковые швы на переднюю половину брюк.

Передняя половина брюк с четырьмя вытачками на уровне линии колена; с двумя горизонтальными подрезами, расположенными на 15 см выше линии колена; с двумя накладными карманами фигурной формы с косым входом, верхними срезами входящими в шов притачивания пояса, а задними – в боковые швы.

Задняя половина брюк с двумя накладными карманами фигурной формы.

На правой стороне брюк на 4,1-4,3 см ниже верхнего кармана должен быть обработан боковой накладной карман фигурной формы с настроенным на него дополнительным накладным карманом с косым входом.

На дополнительном боковом кармане должна быть проложена вертикальная сквозная строчка от верха до низа кармана на расстоянии 4,9-5,1 см от переднего края кармана.

По верхнему краю основного бокового кармана должна быть проложена строчка на расстоянии 2,3-2,5 см от края.

Задняя часть пояса должна быть отстрочена на 5-игольной спецмашине цепного стежка пятью параллельными строчками с расстоянием между ними 0,6-0,7 см.

По швам подрезов, линиям входов в карманы (кроме бокового) и швам настрачивания кармана должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

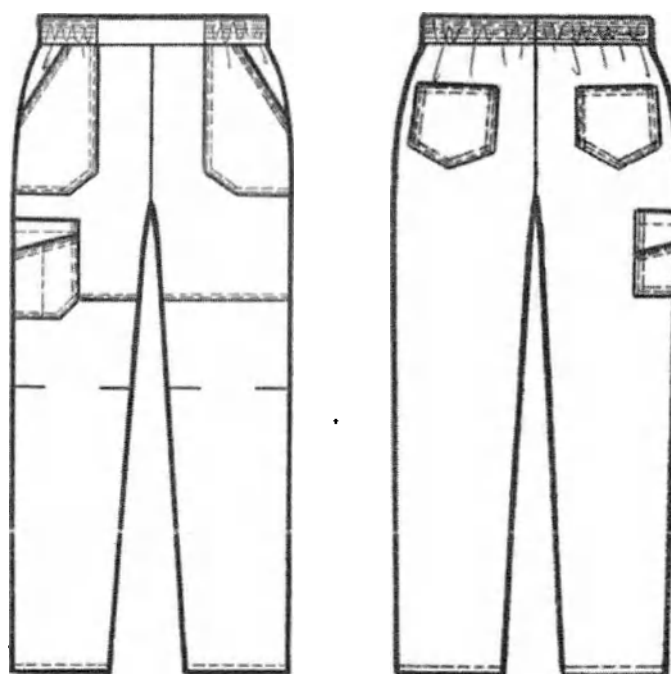


Рисунок В152– Брюки медицинские мужские модель 522

Таблица В152.1 Спецификация деталей кроя Брюки медицинские мужские модель 522

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Верхняя часть передней половинки	2	1
2	Нижняя часть передней половинки	2	1
3	Задняя половинка	2	1
4	Передний пояс	1	0
5	Задний пояс	1	0
6	Верхний карман	2	1
7	Боковой карман основной	1	0
8	Боковой карман дополнительный	1	0
9	Задний карман	2	1
10	Обтачка верхнего кармана	2	1
11	Обтачка бокового кармана	1	0
Итого		17	6

**Таблица В152.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Брюки медицинские мужские 522**

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина по боковому шву, см	158-164	100,1	100,3	100,4	100,6	100,9	101,2	101,4	(±)1,0
		170-176	107,1	107,3	107,4	107,6	107,9	108,2	108,4	
		182-188	114,1	114,3	114,4	114,6	114,9	115,2	115,4	
2	Длина по шаговому шву, см	158-164	72,9	72,7	72,5	72,2	72,0	72,0	71,8	(±)1,0
		170-176	79,9	79,7	79,5	79,2	79,0	79,0	78,8	
		182-188	86,9	86,7	86,5	86,2	86,0	86,0	85,8	
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	46,0	47,8	49,6	51,4	53,3	55,1	56,8	(±)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	31,6	32,6	33,6	34,6	35,6	36,6	37,6	(±)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	20,2	20,6	21,0	21,4	21,7	22,0	22,4	(±)0,5

Продолжение Таблицы В152.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	158-164	101,6	101,7	101,9	102,0	102,1	102,2	102,3	(±)1,0
		170-176	108,6	108,7	108,9	109,0	109,1	109,2	109,3	
		182-188	115,6	115,7	115,9	116,0	116,1	116,2	116,3	
2	Длина по шаговому шву, см	158-164	71,5	71,2	70,9	70,7	70,5	69,6	69,5	(±)1,0
		170-176	78,5	78,2	77,9	77,7	77,5	76,6	76,5	
		182-188	85,5	85,2	84,9	84,7	84,5	83,6	83,5	
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	58,3	60,3	62,1	63,8	65,6	67,8	69,8	(±)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	38,6	39,6	40,4	41,2	42,0	42,8	43,6	(±)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	22,7	23,1	23,5	23,8	24,1	24,5	24,8	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 498 из 529

В153. Брюки медицинские мужские модель 523.

Описание модели

Брюки медицинские мужские зауженные книзу, умеренного объема, с пятью шлевками для пояса.

Передняя половина брюк с притачным поясом шириной 3,4-3,6 см, застегивающимся на одну обметанную петлю и одну пуговицу; с застежкой в среднем шве на молнию-застежку; с закругленными подрезами, выходящими из шва притачивания пояса и заканчивающимися в боковых швах; с карманами в швах подрезов. В углах карманов должны быть установлены металлические хольнитены.

Задняя половина брюк с притачным поясом шириной 3,4-3,6 см и двумя накладными карманами фигурной формы. В углах карманов должны быть установлены металлические хольнитены.

Вдоль застежки с левой стороны должна быть проложена строчка на расстоянии 2,5-2,7 см от края.

По боковым и заднему среднему швам, линиям входа в карманы и швам их настрачивания должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см от края или шва.

По переднему среднему шву, краям шлевок и шву притачивания пояса к передней половине брюк должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

Пояс задней половины брюк должен быть отстрочен на 5-игольной спецмашине цепного стежка пятью параллельными строчками с расстоянием между ними 0,6-0,7 см.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы молния-застежка, хольнитены диаметром 0,5-0,6 см и пластиковая пуговица диаметром 1,7-1,9 см.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

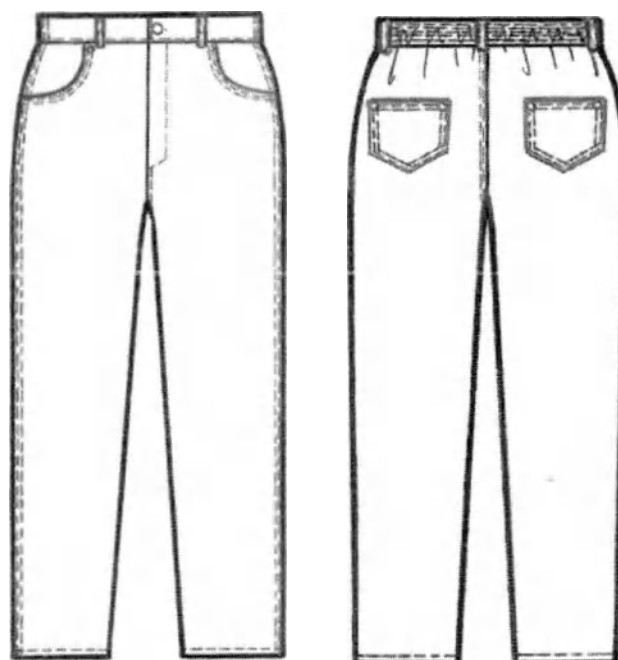


Рисунок В153– Брюки медицинские мужские модель 523

Таблица В153.1 Спецификация деталей кроя Брюки медицинские мужские модель 523

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Передняя половинка	2	1
2	Задняя половинка	2	1
3	Бочок передней половинки, цельновыкроенный с мешковиной	2	1
4	Мешковина кармана	2	1
5	Пояс левой передней половинки	1	0
6	Пояс правой передней половинки	1	0
7	Задний пояс	1	0
8	Задний карман	2	1
9	Обтачка застежки	1	0
10	Откосок	1	0
11	Шлевки	1	0
	Итого	16	5

**Таблица В153.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Брюки медицинские мужские 523**

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина по боковому шву, см	158-164	98,4	98,6	98,7	98,9	99,2	99,5	99,7	(±)1,0
		170-176	105,4	105,6	105,7	105,9	106,2	106,5	106,7	
		182-188	112,4	112,6	112,7	112,9	113,2	113,5	113,7	
2	Длина по шаговому шву, см	158-164	72,4	72,2	72,0	71,7	71,5	71,5	71,3	(±)1,0
		170-176	79,4	79,2	79,0	78,7	78,5	78,5	78,3	
		182-188	86,4	86,2	86,0	85,7	85,5	85,5	85,3	
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	45,5	47,3	49,1	50,9	52,8	54,6	56,3	(±)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	31,4	32,4	33,4	34,4	35,4	36,4	37,4	(±)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	18,8	19,2	19,6	20,0	20,3	20,6	21,0	(±)0,5

Продолжение Таблицы В153.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	158-164	99,9	100,0	100,2	100,3	100,4	100,5	100,6	(±)1,0
		170-176	106,9	107,0	107,2	107,3	107,4	107,5	107,6	
		182-188	113,9	114,0	114,2	114,3	114,4	114,5	114,6	
2	Длина по шаговому шву, см	158-164	71,0	70,7	70,4	70,2	70,0	69,1	69,0	(±)1,0
		170-176	78,0	77,7	77,4	77,2	77,0	76,1	76,0	
		182-188	85,0	84,7	84,4	84,2	84,0	83,1	83,0	
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	57,8	59,8	61,6	63,3	65,1	67,3	69,3	(±)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	38,4	39,4	40,2	41,0	41,8	42,6	43,4	(±)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	21,3	21,7	22,1	22,4	22,7	23,1	23,4	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 501 из 529

В154. Брюки медицинские мужские модель 528.

Описание модели

Брюки медицинские мужские прямого силуэта, умеренного объема.

Верхний срез брюк должен быть обработан притачным поясом шириной 3,4-3,6 см, состоящим из двух частей – передней и задней. Задняя часть пояса должна заходить за боковые швы на переднюю половину брюк.

Передняя половина брюк с четырьмя вытачками на уровне линии колена; с двумя горизонтальными подрезами, расположенными на 15 см выше линии колена; с двумя накладными карманами фигурной формы с косым входом, верхними срезами входящими в шов притачивания пояса, а задними – в боковые швы.

Задняя половина брюк с двумя накладными карманами фигурной формы.

Задняя часть пояса должна быть отстрочена на 5-игольной спецмашине цепного стежка пятью параллельными строчками с расстоянием между ними 0,6-0,7 см.

По швам подрезов, линиям входов в карманы и швам настрачивания кармана должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см от края или шва.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

Для изготовления изделия используются нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

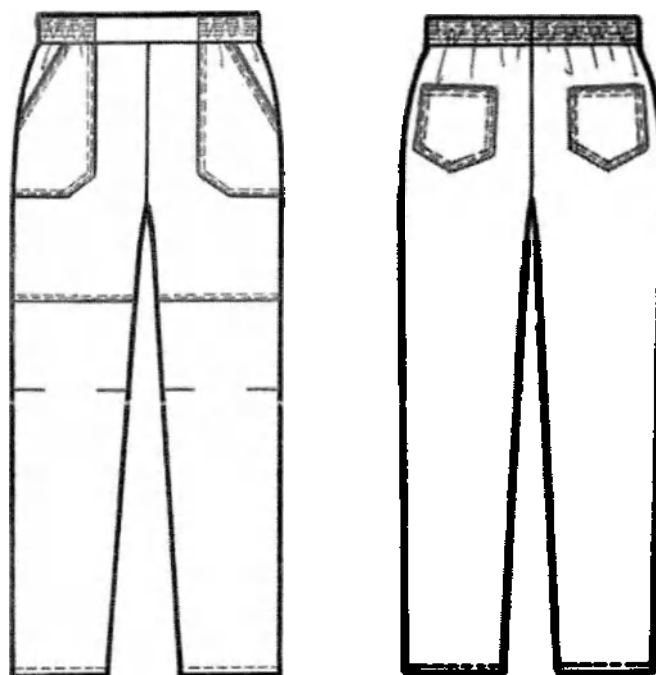


Рисунок В154– Брюки медицинские мужские модель 528

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023. ред.2

Страница 502 из 529

Таблица В154.1 Спецификация деталей кроя Брюки медицинские мужские модель

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Верхняя часть передней половинки	2	1
2	Нижняя часть передней половинки	2	1
3	Задняя половинка	2	1
4	Передний пояс	1	0
5	Задний пояс	1	0
6	Верхний карман	2	1
7	Боковой карман основной	1	0
8	Боковой карман дополнительный	1	0
9	Задний карман	2	1
10	Обтачка верхнего кармана	2	1
11	Обтачка бокового кармана	1	0
Итого		17	6

Таблица В154.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Брюки медицинские мужские 528

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина по боковому шву, см	158-164	100,1	100,3	100,4	100,6	100,9	101,2	101,4	(±)1,0
		170-176	107,1	107,3	107,4	107,6	107,9	108,2	108,4	
		182-188	114,1	114,3	114,4	114,6	114,9	115,2	115,4	
2	Длина по шаговому шву, см	158-164	72,9	72,7	72,5	72,2	72,0	72,0	71,8	(±)1,0
		170-176	79,9	79,7	79,5	79,2	79,0	79,0	78,8	
		182-188	86,9	86,7	86,5	86,2	86,0	86,0	85,8	
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	46,0	47,8	49,6	51,4	53,3	55,1	56,8	(±)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	31,6	32,6	33,6	34,6	35,6	36,6	37,6	(±)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	20,2	20,6	21,0	21,4	21,7	22,0	22,4	(±)0,5

Продолжение Таблицы В154.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	158-164	101,6	101,7	101,9	102,0	102,1	102,2	102,3	(±)1,0
		170-176	108,6	108,7	108,9	109,0	109,1	109,2	109,3	
		182-188	115,6	115,7	115,9	116,0	116,1	116,2	116,3	
2	Длина по шаговому шву, см	158-164	71,5	71,2	70,9	70,7	70,5	69,6	69,5	(±)1,0
		170-176	78,5	78,2	77,9	77,7	77,5	76,6	76,5	
		182-188	85,5	85,2	84,9	84,7	84,5	83,6	83,5	
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	58,3	60,3	62,1	63,8	65,6	67,8	69,8	(±)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	38,6	39,6	40,4	41,2	42,0	42,8	43,6	(±)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	22,7	23,1	23,5	23,8	24,1	24,5	24,8	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В155. Брюки медицинские мужские модель 530.

Описание модели

Брюки медицинские мужские из белой или гладкокрашеной ткани, прямого силуэта, умеренного объема.

Верхний срез брюк должен быть обработан притачным поясом шириной 3,4-3,6 см, состоящим из двух частей – передней и задней. Задняя часть пояса должна заходить за боковые швы на переднюю половину брюк и обрабатываться с вложенной внутрь эластичной тесьмой.

Передняя половина брюк с двумя накладными карманами фигурной формы с косым входом. Верхние срезы карманов входят в шов притачивания пояса, а задними – в боковые швы.

Задняя половина брюк с двумя накладными карманами фигурной формы.

По линиям входов в карманы и швам настрачивания карманов должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см от края.

Задняя часть пояса должна быть отстрочена на 5-игольной спецмашине цепного стежка пятью параллельными строчками с расстоянием между ними 0,6-0,7 см.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

Для изготовления изделия используются нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

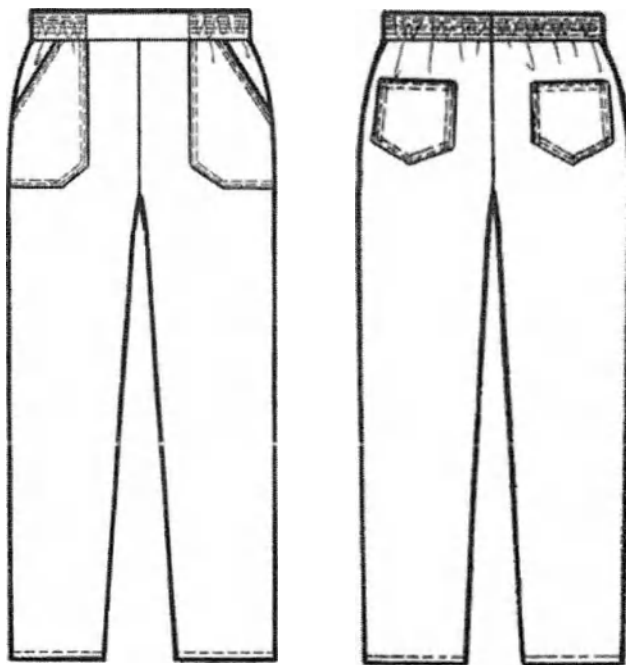


Рисунок В155— Брюки медицинские мужские модель 530

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 504 из 529

Таблица В155.1 Спецификация деталей кроя Брюки медицинские мужские модель 530

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Передняя половинка	2	1
2	Задняя половинка	2	1
3	Передний пояс	1	0
4	Задний пояс	2	1
5	Передний карман	2	1
6	Задний карман	2	1
7	Обтачка переднего кармана	2	1
Итого		13	6

Таблица В155.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Брюки медицинские мужские 530

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина по боковому шву, см	158-164	100,1	100,3	100,4	100,6	100,9	101,2	101,4	(±)1,0
		170-176	107,1	107,3	107,4	107,6	107,9	108,2	108,4	
		182-188	114,1	114,3	114,4	114,6	114,9	115,2	115,4	
2	Длина по шаговому шву, см	158-164	72,9	72,7	72,5	72,2	72,0	72,0	71,8	(±)1,0
		170-176	79,9	79,7	79,5	79,2	79,0	79,0	78,8	
		182-188	86,9	86,7	86,5	86,2	86,0	86,0	85,8	
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	45,0	46,8	48,6	50,4	52,3	54,1	55,8	(±)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	31,2	32,2	33,2	34,2	35,2	36,2	37,2	(±)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	20,1	20,5	20,9	21,3	21,6	21,9	22,3	(±)0,5

Продолжение Таблицы В155.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	158-164	101,6	101,7	101,9	102,0	102,1	102,2	102,3	(±)1,0
		170-176	108,6	108,7	108,9	109,0	109,1	109,2	109,3	
		182-188	115,6	115,7	115,9	116,0	116,1	116,2	116,3	
2	Длина по шаговому шву, см	158-164	71,5	71,2	70,9	70,7	70,5	69,6	69,5	(±)1,0
		170-176	78,5	78,2	77,9	77,7	77,5	76,6	76,5	
		182-188	85,5	85,2	84,9	84,7	84,5	83,6	83,5	
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	57,3	59,3	61,1	62,8	64,8	66,8	68,8	(±)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	38,2	39,2	40,2	41,2	42,2	43,2	44,2	(±)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	22,6	23,0	23,4	23,7	24,0	24,4	24,7	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В156. Брюки медицинские мужские модель 531.

Описание модели

Брюки медицинские мужские из белой или гладкокрашеной ткани, зауженные к низу, длиной до щиколотки.

Верхний срез брюк должен быть обработан притачным поясом шириной 3,4-3,6 см, состоящим из двух частей – передней и задней. Задняя часть пояса должна заходить за боковые швы на переднюю половину брюк и обрабатываться с вложенной внутрь эластичной тесьмой.

Передняя половина брюк с двумя накладными карманами фигурной формы с косым входом. Верхние срезы карманов входят в шов притачивания пояса, а задними – в боковые швы.

Задняя половина брюк с двумя накладными карманами фигурной формы. В подгибку низа задней половины брюк должна быть вложена эластичная тесьма шириной 4,0 см.

По линиям входов в карманы и швам их настрачивания должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8 см от края.

Задняя часть пояса должна быть отстрочена на 5-игольной спецмашине цепного стежка пятью параллельными строчками с расстоянием между ними 0,6-0,7 см.

По низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 4,3-4,5 см от подогнутого края.

Для изготовления изделия используются нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 170-176.

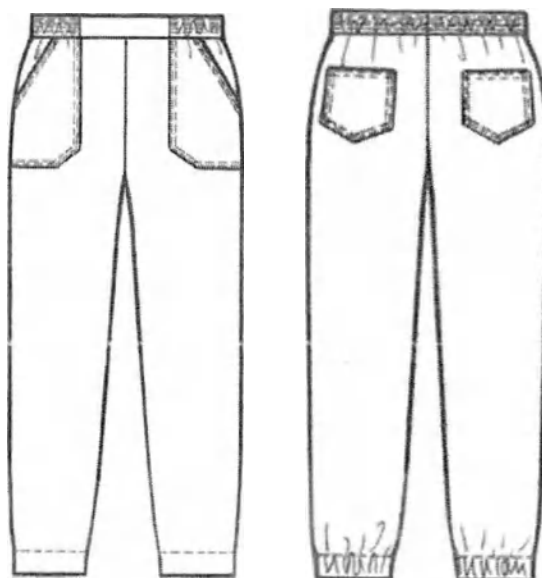


Рисунок В156– Брюки медицинские мужские модель 531

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 506 из 529

Таблица В156.1 Спецификация деталей кроя Брюки медицинские мужские модель

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Передняя половинка	2	1
2	Задняя половинка	2	1
3	Передний пояс	1	0
4	Задний пояс	2	1
5	Передний карман	2	1
6	Задний карман	2	1
7	Обтачка переднего кармана	2	1
Итого		13	6

Таблица В156.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Брюки медицинские мужские 531

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина по боковому шву, см	170-176	102.3	102.5	102.6	102.8	103.1	103.4	103.6	(+/-)1.0
2	Длина по шаговому шву, см	170-176	76.4	76.2	76.0	75.7	75.5	75.5	75.3	(+/-)1.0
3	Ширина на уровне линии талии, см	170-176	45.7	47.5	49.3	51.1	53.0	54.8	56.5	(+/-)1.0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	170-176	31.2	32.2	33.2	34.2	35.2	36.2	37.2	(+/-)0.5
5	Ширина внизу, см	170-176	14.4	14.8	15.2	15.6	16.0	16.4	16.9	(+/-)0.5

Продолжение Таблицы В156.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	170-176	103.8	103.9	104.1	104.2	104.3	104.4	104.5	(+/-)1.0
2	Длина по шаговому шву, см	170-176	75.0	74.7	74.4	74.2	74.0	73.5	73.0	(+/-)1.0
3	Ширина на уровне линии талии, см	170-176	58.0	59.9	61.8	63.5	65.3	67.5	69.5	(+/-)1.0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	170-176	38.2	39.2	40.2	41.2	42.2	43.2	44.2	(+/-)0.5
5	Ширина внизу, см	170-176	17.4	17.9	18.4	18.9	19.4	19.9	20.4	(+/-)0.5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA[®] по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

**В157. Комплект одежды медицинской многоразового использования
LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, мужской № 3 в составе
Описание**

Комплект одежды медицинской мужской для работника скорой помощи состоит из куртки медицинской мужской модель: 03-3 и брюк медицинских мужских модель: 03-3.

Куртка медицинская мужская длиной ниже линии бедер, прямого силуэта, свободного покроя; с разрезами в боковых швах.

Перед с отложными лацканами до линии груди; с центральной бортовой застежкой на 4 кнопки или пуговицы; с притачными кокетками; с одним верхним накладным карманом с фигурным передним краем на левой полочке; с декоративной патой шириной 3,4-3,6см, вшитой одним концом в шов притачивания кокетки над серединой кармана, а другим концом треугольной формы пристегивающейся к карману на кнопку или пуговицу; с двумя нижними накладными карманами с фигурными передними краями, задними боковыми срезами входящими в боковые швы.

Спинка с притачной кокеткой, со средним швом и декоративной патой шириной 3,4-3,6см, вшитой одним концом в шов притачивания кокетки над средним швом, а другим концом треугольной формы пристегивающейся к спинке на кнопку или пуговицу.

Рукава втачные, одношовные, короткие (длиной выше локтя), с декоративными патами шириной 3,4-3,6см, вшитыми одним концом в подгибку посередине рукавов, а другим концом треугольной формы пристегивающимися к рукавам на кнопку или пуговицу.

Воротник – отложной, «пиджачного» типа.

По переду и спинке над швами притачивания кокеток, а также по низу рукавов может быть настрочена светоотражающая лента шириной 2,0-2,5 см.

На верхний карман и на спинку, по желанию потребителя, могут быть настрочены шевроны «скорая помощь».

По краям бортов, лацканам, горловине переда, кокеткам, патам, воротнику и швам настрачивания карманов должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 и 0,7-0,8см от края или шва.

На верхнем кармане куртки должна быть проложена сквозная вертикальная строчка от верха до низа кармана на расстоянии 4,7-4,9см от переднего края кармана.

По верхним краям карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,3-2,5см от края.

По низу куртки должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5см от края.


По разрезам и шву втачивания воротника в горловину спинки должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 508 из 529

В качестве фурнитуры должны быть использованы пластиковые кнопки диаметром

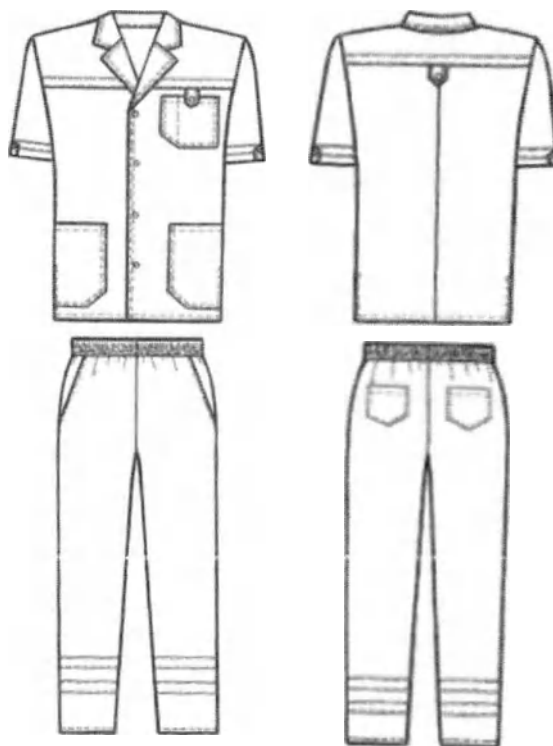

1,2-1,4см, пластиковые пуговицы диаметром 1,7-1,9см.

Брюки медицинские мужские прямого силуэта, слегка зауженные книзу, умеренного объема.

Верхний срез брюк должен быть обработан притачным поясом шириной 3,4-3,6 см.

Передняя половина брюк с двумя косыми подрезами, выходящими из шва притачивания пояса и заканчивающимися в боковых швах; с карманами в швах подрезов.

Задняя половина брюк с двумя накладными карманами фигурной формы.

По низу брюк, на расстоянии 20-23 см от края, могут быть настроены 2 ряда светоотражающей тесьмы шириной 2,5 см.

Пояс брюк должен быть отстрочен по всей длине на 5-игольной спецмашине цепного стежка пятью параллельными строчками с расстоянием между ними 0,6-0,7 см.

По линиям входов в передние карманы и швам настрачивания задних карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По линиям входа в задние карманы и по низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

Рисунок В157– Куртка и брюки медицинские мужские модель 03-3

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоцелевого использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 509 из 529

Таблица В157.1 Спецификация деталей кроя

Куртка и брюки медицинские мужские модель 03-3

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
КУРТКА			
Основная ткань			
1	Полочка	2	1
2	Спинка	2	1
3	Кокетка полочки	2	1
4	Кокетка спинки	1	0
5	Рукав	2	1
6	Верхний карман	1	0
7	Нижний карман	2	1
8	Воротник	2	1
9	Подборт	2	1
10	Пата спинки	2	1
11	Пата кармана	2	1
12	Пата рукава	4	2
	Итого	24	11
БРЮКИ			
Основная ткань			
13	Передняя половинка	2	1
14	Задняя половинка	2	1
15	Мешковина кармана	2	1
16	Бочок передней половинки, цельновыкроенный с мешковиной	2	1
17	Пояс	2	1
18	Задний карман	2	1
	Итого	12	6
ИТОГО по комплекту		36	17

Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Таблица В157.2 (КУРТКА)

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	70,6	70,8	71,0	71,3	71,6	71,8	72,0	(±)1,0
		170-176	74,6	74,8	75,0	75,3	75,6	75,8	76,0	
		182-188	78,6	78,8	79,0	79,3	79,6	79,8	80,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	44,1	45,0	46,0	46,9	47,8	48,6	49,4	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164	71,7	72,2	72,9	73,5	74,2	74,8	75,4	(±)1,0
		170-176	75,7	76,2	76,9	77,5	78,2	78,8	79,4	
		182-188	79,7	80,2	80,9	81,5	82,2	82,8	83,4	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	(±)1,0

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164 170-176 182-188	24,4 26,4 28,4	24,8 26,8 28,8	24,8 26,8 28,8	25,1 27,1 29,1	25,4 27,4 29,4	25,7 27,7 29,7	26,1 28,1 30,1	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	19,6	20,2	20,8	21,4	22,0	22,7	23,3	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	18,8	19,2	19,8	20,2	20,7	21,2	21,8	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	13,0	13,4	13,4	13,8	13,8	13,8	14,4	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,5	12,8	12,8	13,4	13,4	13,4	13,7	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	17,5	18,1	19,0	19,0	19,3	19,3	20,1	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана посередине, см	все роста	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,6	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	46,0	47,0	48,0	49,0	50,0	51,0	52,0	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В157.2 (КУРТКА)

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	158-164 170-176 182-188	72,3 76,3 80,3	72,4 76,4 80,4	72,8 76,8 80,8	73,0 77,0 81,0	73,3 77,3 81,3	73,5 77,5 81,5	73,6 77,6 81,6	(+/-)1,0
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	50,1	50,9	51,5	52,1	52,8	53,6	53,4	(+/-)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164 170-176 182-188	76,0 80,0 64,0	76,6 80,6 84,6	77,2 81,2 85,2	77,8 81,8 85,8	78,3 82,3 86,3	78,8 82,8 86,8	79,3 83,3 87,3	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	81,0	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	65,5	67,5	69,6	71,7	73,8	76,0	78,2	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164 170-176 182-188	26,4 28,4 30,4	26,5 28,5 30,5	27,0 29,0 31,0	27,3 29,3 31,3	27,7 29,7 31,7	28,1 30,1 32,1	28,5 30,5 32,5	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	24,0	24,8	25,6	26,3	27,0	27,6	28,3	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	22,2	23,0	23,8	24,4	24,9	25,8	26,3	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	14,4	14,4	14,8	14,8	14,8	15,2	15,2	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	13,7	13,7	13,8	13,8	13,8	14,0	14,0	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	20,1	20,8	20,8	20,8	21,4	22,2	22,2	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана посередине, см	все роста	20,6	20,8	20,8	20,8	20,9	21,0	21,0	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	53,0	54,0	54,9	55,8	56,7	57,6	58,5	(+/-)0,5

Таблица В157.3 (БРЮКИ)

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина по боковому шву, см	158-164 170-176 182-188	100,3 107,3 114,3	100,5 107,5 114,5	100,6 107,6 114,6	100,8 107,8 114,8	101,1 108,1 115,1	101,4 108,4 115,4	101,6 108,6 115,6	(+/-)1,0
2	Длина по шаговому шву, см	158-164 170-176 182-188	72,9 79,9 86,9	72,7 79,7 86,7	72,5 79,5 86,5	72,2 79,2 86,2	72,0 79,0 86,0	72,0 79,0 86,0	71,8 78,8 85,8	(+/-)1,0

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

3	Ширина на уровне талии, см	все роста	49,2	51,0	52,8	54,6	56,5	58,3	60,0	(+/-)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	33,2	34,2	35,2	36,2	37,2	38,2	39,2	(+/-)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	22,0	22,4	22,8	23,2	23,5	23,8	24,2	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В157.3 (БРЮКИ)

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	158-164	101,8	101,9	102,1	102,2	102,3	102,4	102,5	(+/-)1,0
		170-176	108,8	108,9	109,1	109,2	109,3	109,4	109,5	
		182-188	115,8	115,9	116,1	116,2	116,3	116,4	116,5	
2	Длина по шаговому шву, см	158-164	71,5	71,2	70,9	70,7	70,5	69,6	69,5	(+/-)1,0
		170-176	78,5	78,2	77,9	77,7	77,5	76,6	76,5	
		182-188	85,5	85,2	84,9	84,7	84,5	83,6	83,5	
3	Ширина на уровне талии, см	все роста	61,5	63,5	65,3	67,0	68,8	71,0	73,0	(+/-)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	40,2	41,2	42,0	42,8	43,6	44,4	45,2	(+/-)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	24,5	24,9	25,3	25,6	25,9	26,3	26,6	(+/-)0,5

В158. Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, мужской № 4 в составе:

Описание

Комплект одежды медицинской мужской для работника скорой помощи состоит из куртки медицинской мужской модель: 03-4 и брюк медицинских мужских модель: 03-4.

Куртка медицинская мужская длиной ниже линии бедер, прямого силуэта, свободного покроя; с разрезами в боковых швах.

Перед с притачной кокеткой, с центральной застежкой на кокетке (от горловины до шва притачивания кокетки) на 3 кнопки; с одним верхним накладным карманом с левой стороны переда, пришитым ниже шва притачивания кокетки; с двумя нижними накладными карманами, задними срезами входящими в боковые швы, а нижними – в подгибку низа изделия.

Спинка со средним швом.

Рукава втачные, одношовные, короткие (длиной выше локтя).

Воротник – стойка.

По переду и спинке выше линии груди, а также по низу рукавов может быть настрочена светоотражающая лента шириной 2,0-2,5 см.

На верхний карман и на спинку, по желанию потребителя, могут быть настрочены шевроны «скорая помощь».

По кокетке, краям воротника, разрезов, застежки, по швам настрачиванию карманов и шву втачивания воротника в горловину должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2см от края или шва.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

По верхним краям карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 2,0-2,2 см.

На верхнем кармане должна быть проложена сквозная вертикальная строчка от верха до низа кармана на расстоянии 5,0-5,2 см от переднего края кармана.

По низу изделия и низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

В качестве фурнитуры должны быть использованы металлические кнопки диаметром 1,0-1,2 см.

Брюки медицинские мужские прямого силуэта, слегка зауженные книзу, умеренного объема.

Верхний срез брюк должен быть обработан притачным поясом шириной 3,4-3,6 см.

Передняя половина брюк с двумя косыми подрезами, выходящими из шва притачивания пояса и заканчивающимися в боковых швах; с карманами в швах подрезов.

Задняя половина брюк с двумя накладными карманами фигурной формы.

По низу брюк, на расстоянии 20-23 см от края, могут быть настроены 2 ряда светоотражающей тесьмы шириной 2,5 см.

Пояс брюк должен быть отстрочен по всей длине на 5-игольной спецмашине цепного стежка пятью параллельными строчками с расстоянием между ними 0,6-0,7 см.

По линиям входов в передние карманы и швам настрочивания задних карманов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По линиям входа в задние карманы и по низу изделия должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

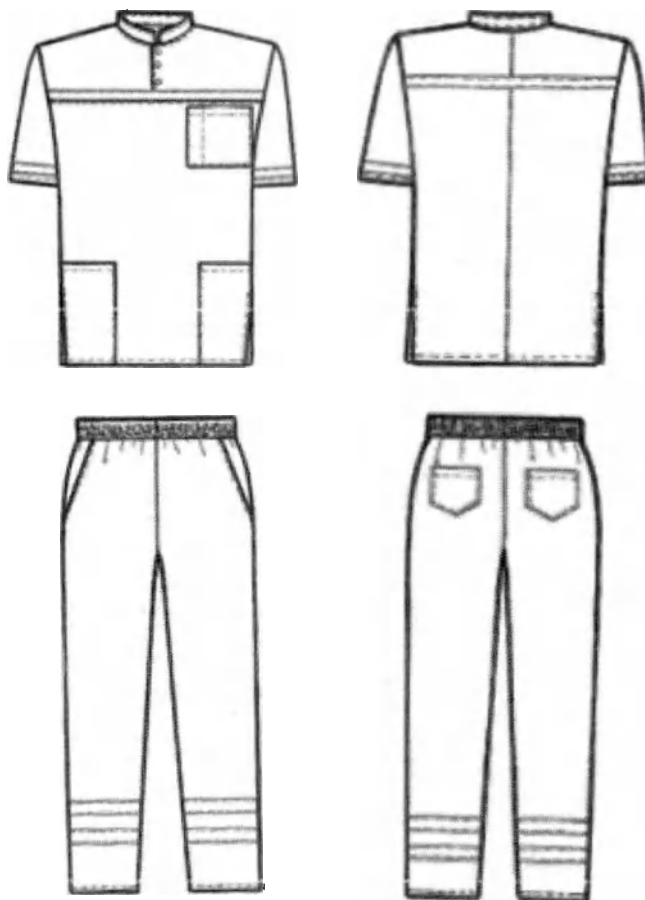


Рисунок В158– Куртка и брюки медицинские мужские модель 03-4

Таблица В158.1 Спецификация деталей кроя

Куртка и брюки медицинские мужские модель 03-4

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет. кроя	Кол-во зеркально
КУРТКА			
Основная ткань			
1	Перед	1	0
2	Спинка	2	1
3	Кокетка переда	2	1
4	Верхний карман	1	0
5	Нижний карман	2	1
6	Рукав	2	1
7	Воротник	2	1
8	Обтачка застежки	2	1
Итого		14	6
БРЮКИ			
Основная ткань			
9	Передняя половинка	2	1
10	Задняя половинка	2	1

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет. кроя	Кол-во зеркально
11	Мешковина кармана	2	1
12	Бочок передней половинки, цельновыкроенный с мешковиной	2	1
13	Пояс	2	1
14	Задний карман	2	1
	Итого	12	6
	ИТОГО по комплекту	26	12

Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Таблица В158.2 (КУРТКА)

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	70,8	71,0	71,1	71,2	71,5	71,7	72,0	(±)1,0
		170-176	74,8	75,0	75,1	75,2	75,5	75,7	76,0	
		182-188	78,8	79,0	79,1	79,2	79,5	79,7	80,0	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	44,1	45,0	46,0	46,9	47,8	48,6	49,4	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164	72,3	72,8	73,5	74,1	74,8	75,4	76,0	(±)1,0
		170-176	76,3	76,8	77,5	78,1	78,8	79,4	80,0	
		182-188	80,3	80,8	81,5	82,1	82,8	83,4	84,0	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	54,3	56,3	58,3	60,3	62,3	64,3	66,3	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	158-164	25,0	25,2	25,5	25,6	25,9	26,1	26,3	(±)0,5
		170-176	27,0	27,2	27,5	27,6	27,9	28,1	28,3	
		182-188	29,0	29,2	29,5	29,6	29,9	30,1	30,3	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	19,8	20,5	21,2	21,9	22,4	23,3	24,0	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	19,0	19,4	20,0	20,4	20,9	21,4	22,0	(±)0,5
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	13,5	13,5	13,5	14,0	14,0	14,0	14,4	(±)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	12,7	12,8	12,9	13,4	13,4	13,4	13,7	(±)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	17,0	17,4	17,7	18,1	18,5	19,0	19,5	(±)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	19,5	19,5	19,6	19,7	19,8	19,8	20,0	(±)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	42,0	43,0	44,0	45,0	46,2	47,2	47,8	(±)0,5

Продолжение Таблицы В158.2 (КУРТКА)

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	72,1	72,2	72,6	72,8	73,0	73,2	73,4	(±)1,0
		170-176	76,1	76,2	76,6	76,8	77,0	77,2	77,4	
		182-188	80,1	80,2	80,6	80,8	81,0	81,2	81,4	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	50,1	50,9	51,5	52,1	52,8	53,6	53,4	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164	76,6	77,2	77,8	78,4	78,9	79,4	79,9	(±)1,0
		170-176	80,6	81,2	81,8	82,4	82,9	83,4	83,9	

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
		182-188	84,6	85,2	85,8	86,4	86,9	87,4	87,9	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	68,3	70,3	72,3	74,3	76,3	78,3	80,3	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу, см	все роста	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164	26,7	26,9	27,4	27,8	28,1	28,6	29,0	(±)0,5
		170-176	28,7	28,9	29,4	29,8	30,1	30,6	31,0	
		182-188	30,7	30,9	31,4	31,8	32,1	32,6	33,0	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	24,7	25,5	26,4	27,0	27,8	28,5	29,2	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	22,4	23,2	24,0	24,6	25,1	26,0	26,5	(+/-)0,5
9	Ширина верхнего кармана по линии входа, см	все роста	14,4	14,4	14,7	14,7	14,7	15,2	15,2	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	13,7	13,7	13,8	13,8	13,8	13,8	14,2	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	20,0	20,5	20,9	21,5	22,1	22,4	22,5	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,4	(+/-)0,3
13	Длина воротника по отлету, см	все роста	48,8	49,8	50,8	51,6	52,8	54,6	55,8	(+/-)0,5

Таблица В158.3 (БРЮКИ)

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина по боковому шву, см	158-164	100,3	100,5	100,6	100,8	101,1	101,4	101,6	(±)1,0
		170-176	107,3	107,5	107,6	107,8	108,1	108,4	108,6	
		182-188	114,3	114,5	114,6	114,8	115,1	115,4	115,6	
2	Длина по шаговому шву, см	158-164	72,9	72,7	72,5	72,2	72,0	72,0	71,8	(±)1,0
		170-176	79,9	79,7	79,5	79,2	79,0	79,0	78,8	
		182-188	86,9	86,7	86,5	86,2	86,0	86,0	85,8	
3	Ширина на уровне талии, см	все роста	49,2	51,0	52,8	54,6	56,5	58,3	60,0	(+/-)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	33,2	34,2	35,2	36,2	37,2	38,2	39,2	(+/-)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	22,0	22,4	22,8	23,2	23,5	23,8	24,2	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В158.3 (БРЮКИ)

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	158-164	101,8	101,9	102,1	102,2	102,3	102,4	102,5	(±)1,0
		170-176	108,8	108,9	109,1	109,2	109,3	109,4	109,5	
		182-188	115,8	115,9	116,1	116,2	116,3	116,4	116,5	
2	Длина по шаговому шву, см	158-164	71,5	71,2	70,9	70,7	70,5	69,6	69,5	(±)1,0
		170-176	78,5	78,2	77,9	77,7	77,5	76,6	76,5	
		182-188	85,5	85,2	84,9	84,7	84,5	83,6	83,5	
3	Ширина на уровне талии, см	все роста	61,5	63,5	65,3	67,0	68,8	71,0	73,0	(+/-)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	40,2	41,2	42,0	42,8	43,6	44,4	45,2	(+/-)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	24,5	24,9	25,3	25,6	25,9	26,3	26,6	(+/-)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

**B159. Комплект одежды медицинской многоразового использования
LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, мужской № 5 в составе:**

Описание

Комплект одежды медицинской мужской для работника скорой помощи состоит из куртки медицинской мужской модель: 03-13 и брюк медицинских мужских модель: 03-13.

Куртка мужская из гладкокрашеной ткани, длиной ниже линии бёдер, прямого силуэта, умеренного объёма. Перед изделия короче спинки на 3,0 см, в боковых швах разрезы. Горловина V – образной формы, обработана на спинке обтачкой, а на передё – притачными планками шириной 2,8-3,0 см.

Перед с отрезной кокеткой, в шов притачивания который входят концы планок горловины; с двумя наклонными рельефными швами выходящими из шва притачивания кокетки и доходящими до низа; с одним верхним накладным карманом фигурной формы, расположенным на левой стороне переда на 1,2 см ниже шва притачивания кокетки и входящим боковым срезом в рельефный шов; с двумя нижними накладными карманами, боковые срезы которых входят в рельефные и боковые швы, а нижние срезы – в подгибку низа изделия. Верхние части карманов шириной 3,4-3,6 см должны быть отрезными и в швах их притачивания должны быть обработаны застежки на тесьму-«молнию».

Спинка с притачной кокеткой, средним швом и двумя мягкими складками, заложенными в шве притачивания кокетки.

Рукава втачные, одношовные, длиной выше локтя.

По переду и спинке вдоль швов притачивания кокеток должна быть настрочена светоотражающая лента шириной 2,0-2,5 см.

На верхний карман должен быть настрочен шеврон «скорая помощь» диаметром 6,7 см; на спинку под кокеткой должен быть настрочен прямоугольный шеврон «скорая помощь» размером 29,0-10,0 см.

По рельефам, швам притачивания кокеток и планок горловины переда, по швам настрачивания верхнего кармана, а так же по швам настрачивания верхних краев нижних карманов должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 см и 0,7-0,8 см от края или шва.

По разрезам и горловине переда и спинки должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края

По линии входа верхнего накладного кармана должна быть проложена строчка на расстоянии 1,8-2,0 см от края.

По низу изделия и низу рукавов должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

Брюки мужские из гладкокрашеной ткани, умеренного объёма, с пятью шлевками для пояса.

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 517 из 529

Верхний срез брюк должен быть обработан притачным поясом шириной 3,4-3,6 см, состоящим из двух частей-передней и задней. Задняя часть пояса должна заходить за боковые швы на переднюю половину брюк и обрабатывается с вложенной внутрь эластичной тесьмой.

Передняя половина брюк с двумя косыми подрезами, выходящими из шва притачивания пояса и заканчивающимися в боковых шагах; с карманами в швах подрезов.

Ниже линии бедер должны быть настроены 2 объемных кармана, большая часть которых располагается на передней половине брюк. Входы в карманы должны закрываться клапанами фигурной формы, пристегивающимися с помощью контактной ленты.

По низу брюк, на расстоянии 20-23 см от края, должны быть настроены 2 ряда светоотражающей тесьмы шириной 2,5 см.

Задняя часть должна быть отстрочена на 5-игольной машине цепного стежка пятью параллельными строчками с расстоянием 0,6-0,7 см.

По линиям входов верхних карманов, по краям клапанов и нижним швам настрачивания накладных карманов должна быть проложена двойная строчка на расстоянии 0,1-0,2 см и 0,7-0,8 см от края или шва.

По швам настрачивания клапанов должна быть проложена строчка на расстоянии 0,6-0,7 см от шва.

По боковым краям накладных карманов и краям шлевок должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1-0,2 см от края или шва.

По низу брюк должна быть проложена строчка на расстоянии 1,3-1,5 см от края.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани и цветом светоотражающей ленты.

Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

Рост: 158-164, 170-176, 182-188.

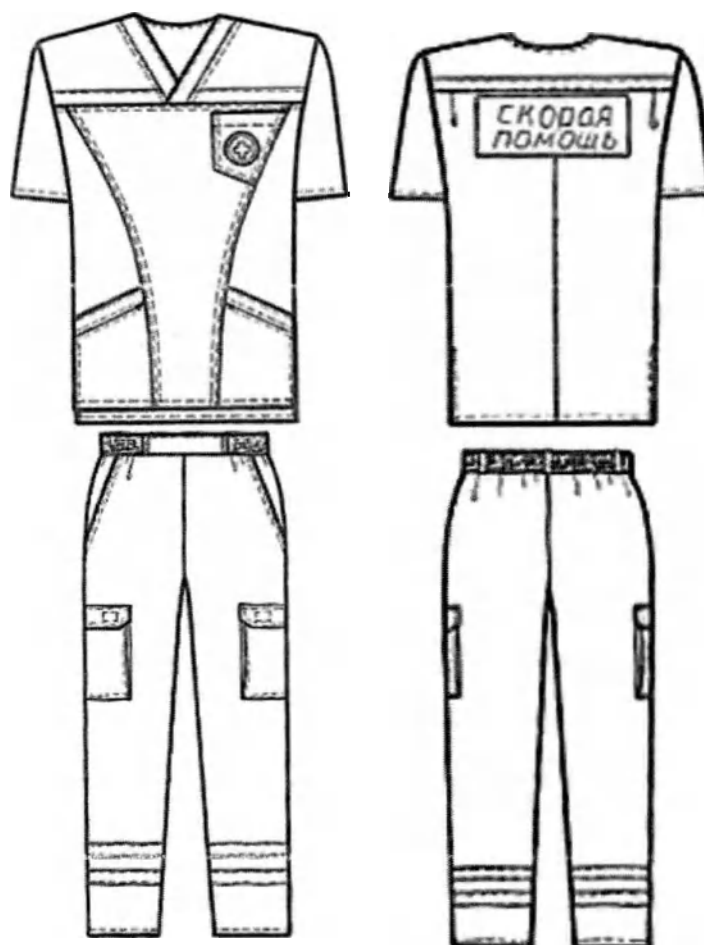


Рисунок В159– Куртка и брюки медицинские мужские модель 03-13

Таблица В159.1 Спецификация деталей кроя

Куртка и брюки медицинские мужские модель 03-13

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
КУРТКА			
Основная ткань			
1	Средняя часть переда	1	0
2	Бочок переда	2	1
3	Кокетка переда	2	1
4	Спинка	2	1
5	Кокетка спинки	1	0
6	Рукав	2	1
7	Верхний карман	1	0
8	Нижний карман	2	1
9	Планка нижнего кармана	2	1
10	Планка горловины переда	2	1
11	Обтачка горловины спинки	1	0
Итого		18	7
БРЮКИ			

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоцелевого использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 519 из 529

Основная ткань			
12	Передняя половинка	2	1
13	Задняя половинка	2	1
14	Мешковина кармана	2	1
15	Бочок передней половинки, цельновыкроенный с мешковиной	2	1
16	Пояс	2	1
17	Передняя вставка пояса	1	0
18	Боковой карман	2	1
19	Клапан бокового кармана	4	2
	Итого	17	8
	ИТОГО по комплекту	35	15

Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Таблица В159.2 (КУРТКА)

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	72,8	73,0	73,1	73,2	73,4	73,7	73,8	(±)1,0
		170-176	76,8	77,0	77,1	77,2	77,4	77,7	77,8	
		182-188	80,8	81,0	81,1	81,2	81,4	81,7	81,8	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	44,6	45,4	46,3	47,2	47,9	48,6	49,2	(±)0,5
3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164	70,0	70,8	71,6	72,5	73,2	73,9	74,5	(±)1,0
		170-176	74,0	74,8	75,6	76,5	77,2	77,9	78,5	
		182-188	78,0	78,8	79,6	80,5	81,2	81,9	82,5	
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	67,5	(±)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	(±)1,0
6	Длина рукава, см	158-164	23,3	23,5	23,8	24,1	24,4	24,7	25,1	(±)0,5
		170-176	25,3	25,5	25,8	26,1	26,4	26,7	27,1	
		182-188	27,3	27,5	27,8	28,1	28,4	28,7	29,1	
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	20,0	20,6	21,3	21,9	22,5	23,3	24,1	(±)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	19,0	19,5	20,0	20,6	21,2	21,9	22,5	(±)0,5
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	12,0	12,1	12,1	12,6	12,6	12,8	12,8	(±)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	(±)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	16,3	17,0	17,7	18,5	19,2	20,0	20,7	(±)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	22,8	22,8	22,8	22,9	22,9	23,0	23,0	(±)0,3

Продолжение Таблицы В159.2 (КУРТКА)

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина спинки посередине, см	158-164	74,0	74,3	74,4	74,5	74,8	75,1	75,3	(±)1,0
		170-176	78,0	78,3	78,4	78,5	78,8	79,1	79,3	
		182-188	82,0	82,3	82,4	82,5	82,8	83,1	83,3	
2	Ширина спинки в самом узком месте, см	все роста	49,8	50,5	51,2	51,8	52,5	53,2	53,8	(±)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

3	Длина полочки от высшей точки горловины до низа, см	158-164 170-176 182-188	75,2 79,2 83,2	75,9 79,9 83,9	76,7 80,7 84,7	77,4 81,4 85,4	78,1 82,1 86,1	78,8 82,8 86,8	79,5 83,5 87,5	(+/-)1,0
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы, см	все роста	69,5	71,5	73,5	75,5	77,5	79,4	81,2	(+/-)1,0
5	Ширина изделия внизу (с учётом ширины полузаноса застёжки), см	все роста	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	75,8	77,6	(+/-)1,0
6	Длина рукава, см	158-164 170-176 182-188	25,4 27,4 29,4	25,7 27,7 29,7	26,1 28,1 30,1	26,5 28,5 30,5	26,8 28,8 30,8	27,1 29,1 31,1	27,4 29,4 31,4	(+/-)0,5
7	Ширина рукава под проймой, см	все роста	24,8	25,6	26,4	27,1	27,8	28,6	29,4	(+/-)0,5
8	Ширина рукава внизу, см	все роста	23,2	24,0	24,7	25,3	26,0	26,8	27,6	(+/-)0,3
9	Ширина верхнего кармана, см	все роста	13,0	13,0	13,5	13,5	13,8	13,8	13,8	(+/-)0,3
10	Глубина верхнего кармана по переднему краю, см	все роста	9,9	9,9	10,1	10,1	10,4	10,4	10,4	(+/-)0,3
11	Ширина нижнего кармана по линии входа, см	все роста	21,4	22,2	23,0	21,5	22,0	22,5	23,0	(+/-)0,3
12	Глубина нижнего кармана по переднему краю, см	все роста	23,4	23,4	23,4	23,6	23,7	23,9	23,9	(+/-)0,3

Таблица В159.3 (БРЮКИ)

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			44	46	48	50	52	54	56	
1	Длина по боковому шву, см	158-164 170-176 182-188	100,1 107,1 114,1	100,3 107,3 114,3	100,4 107,4 114,4	100,6 107,6 114,6	100,9 107,9 114,9	101,2 108,2 115,2	101,4 108,4 115,4	(+/-)1,0
2	Длина по шаговому шву, см	158-164 170-176 182-188	72,9 79,9 86,9	72,7 79,7 86,7	72,5 79,5 86,5	72,2 79,2 86,2	72,0 79,0 86,0	72,0 79,0 86,0	71,8 78,8 85,8	(+/-)1,0
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	45,0	46,8	48,6	50,4	52,3	54,1	55,8	(+/-)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	31,2	32,2	33,2	34,2	35,2	36,2	37,2	(+/-)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	20,1	20,5	20,9	21,3	21,6	21,9	22,3	(+/-)0,5

Продолжение Таблицы В159.3 (БРЮКИ)

№	Наименование измерения	Рост	Размер							Допуск, см
			58	60	62	64	66	68	70	
1	Длина по боковому шву, см	158-164 170-176 182-188	101,6 108,6 115,6	101,7 108,7 115,7	101,9 108,9 115,9	102,0 109,0 116,0	102,1 109,1 116,1	102,2 109,2 116,2	102,3 109,3 116,3	(+/-)1,0
2	Длина по шаговому шву, см	158-164 170-176 182-188	71,5 78,5 85,5	71,2 78,2 85,2	70,9 77,9 84,9	70,7 77,7 84,7	70,5 77,5 84,5	69,6 76,6 83,6	69,5 76,5 83,5	(+/-)1,0
3	Ширина на уровне линии талии, см	все роста	57,3	59,3	61,1	62,8	64,8	66,8	68,8	(+/-)1,0
4	Ширина на уровне среднего шва, см	все роста	38,2	39,2	40,2	41,2	42,2	43,2	44,2	(+/-)0,5
5	Ширина внизу, см	все роста	22,6	23,0	23,4	23,7	24,0	24,4	24,7	(+/-)0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В160. Головной убор медицинский модель 011.

Описание модели

Головной убор – берет медицинский, состоящий из донышка и притачной планки шириной 1,4 – 1,6 см.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размер: 56-66.

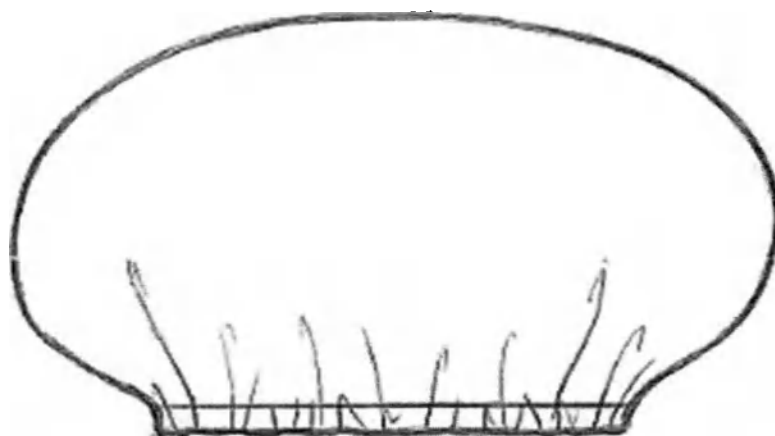


Рисунок В160– Головной убор медицинский модель 011

Таблица В160.1 Спецификация деталей кроя Головной убор медицинский модель 011

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Донышко	1	0
2	Планка	1	0
Итого		2	0

**Таблица В160.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Головной убор медицинский модель 011**

№	Наименование измерения	Размер	Значение измерения, см	Допуск, см
1	Диаметр донышка	56-66	48,0	(+/-) 0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 522 из 529

В161. Головной убор медицинский модель 511.

Описание модели

Головной убор медицинский с невысокой стенкой (высота спереди 11,0 – 11,2 см) и доньшком, переходящим в затылочную часть, что обеспечивает более плотное прилегание к голове сзади.

По нижнему краю колпака должна быть проложена строчка на расстоянии 1,8 – 2,0 см от края.

По шву соединения стенки колпака с доньшком должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1 – 0,2 см от шва.

Головной убор медицинский модель 511 должен изготавливаться из ткани с принтом.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 56 – 58, 60-62.

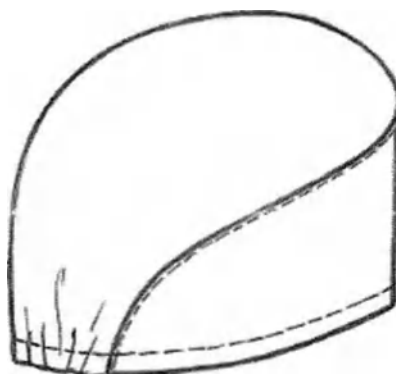


Рисунок В161– Головной убор медицинский модель 511

Таблица В161.1 Спецификация деталей кроя Головной убор медицинский модель 511

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Доньшко	1	0
2	Стенка	1	0
Итого		2	0

**Таблица В161.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Головной убор медицинский модель 511**

№	Наименование измерения	Значение измерения, см		Допуск, см
		Размер 56 - 58	Размер 60 - 62	
1	Длина внутренней окружности	59,0	63,0	(+/-) 0,5
2	Высота стенки спереди	11,0	11,0	(+/-) 0,3
3	Ширина доньшка	16,0	17,0	(+/-) 0,2

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В162. Головной убор медицинский модель 512.

Описание модели

Головной убор медицинский с невысокой стенкой (высота спереди 11,0 – 11,2 см) и доньшком, переходящим в затылочную часть, что обеспечивает более плотное прилегание к голове сзади.

По нижнему краю колпака должна быть проложена строчка на расстоянии 1,8 – 2,0 см от края.

По шву соединения стенки колпака с доньшком должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1 – 0,2 см от шва.

Головной убор медицинский модель 512 должен изготавливаться из белой или гладкокрашеной ткани.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 56 – 58, 60-62.

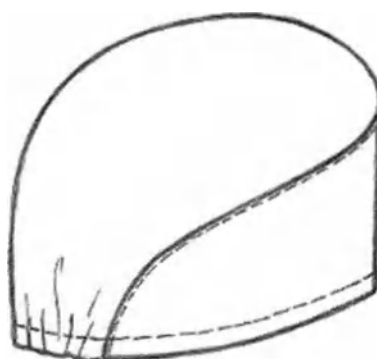


Рисунок В162– Головной убор медицинский модель 512

Таблица В162.1 Спецификация деталей кроя Головной убор медицинский модель 512

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Доньшко	1	0
2	Стенка	1	0
Итого		2	0

**Таблица В162.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Головной убор медицинский модель 512**

№	Наименование измерения	Значение измерения, см		Допуск, см
		Размер 56 - 58	Размер 60 - 62	
1	Длина внутренней окружности	59,0	63,0	(+/-) 0,5
2	Высота стенки спереди	11,0	11,0	(+/-) 0,3
3	Ширина доньшка	16,0	17,0	(+/-) 0,2

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 524 из 529

В163. Головной убор медицинский модель 513.

Описание модели

Головной убор медицинский, состоящий из донышка, стенки высотой 15,4 – 15,6 см (спереди) и затылочной части.

Нижний край стенки колпака должен быть обработан подгибкой шириной 3,5 – 3,6 см, застроченной на лицевую сторону.

По нижнему краю и шву застрачивая подгибки стенки колпака должна быть проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1 – 0,2 и 0,7 – 0,8 см от края или шва

По нижнему краю затылочной части должна быть проложена строчка на расстоянии 3,4 – 3,5 см от края. По шву притачивания донышка колпака должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1 – 0,2 см от шва.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 56 – 58, 60-62.

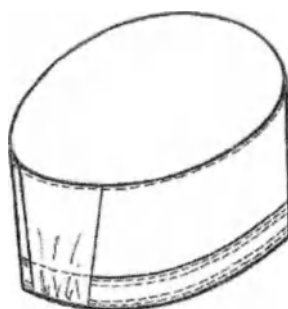


Рисунок В163– Головной убор медицинский модель 513

Таблица В163.1 Спецификация деталей кроя Головной убор медицинский модель 513

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Донышко	1	0
2	Стенка	1	0
3	Затылочная часть	1	0
Итого		3	0

Таблица В163.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них Головной убор медицинский модель 513

№	Наименование измерения	Значение измерения, см		Допуск, см
		Размер 56 - 58	Размер 60 - 62	
1	Длина внутренней окружности	62,0	66,0	(+/-) 0,5
2	Высота стенки спереди	15,6	15,6	(+/-) 0,3
3	Высота стенки сзади	14,3	14,3	(+/-) 0,3
4	Длина донышка	18,5	19,6	(+/-) 0,2

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

В164. Головной убор медицинский модель 515.

Описание модели

Головной убор медицинский, состоящий из донышка, двойной стенки высотой 16,0 – 16,2 см, с отложным бортиком высотой 5,3 – 5,5 см и затылочной части шириной 8,3 – 8,5 см.

Для регулировки объема в швы втачивания затылочной части по низу колпака должны быть вшиты завязки длиной 31,5 – 32,0 см.

По швам застрачивания завязок и шву притачивания донышка должна быть проложена строчка на расстоянии 0,1 – 0,2 см от края или шва.

Для изготовления изделия должны использоваться нитки в тональном сочетании с цветом ткани.

Размеры: 56–58, 60-62.

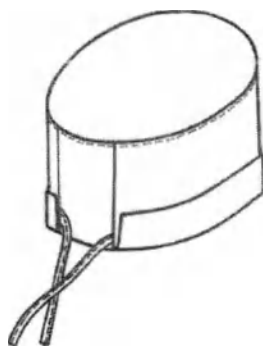


Рисунок В164– Головной убор медицинский модель 515

Таблица В164.1 Спецификация деталей кроя Головной убор медицинский модель 515

№	Наименование деталей кроя	Кол-во дет.кроя	Кол-во зеркально
Основная ткань			
1	Донышко	2	1
2	Стенка	1	0
3	Затылочная часть	1	0
4	Завязка	2	1
Итого		6	2

**Таблица В164.2 Величины основных измерений и допустимые отклонения от них
Головной убор медицинский модель 515**

№	Наименование измерения	Значение измерения, см		Допуск, см
		Размер 56 - 58	Размер 60 - 62	
1	Длина внутренней окружности	58,0	62,0	(+/-) 0,5
2	Высота стенки	16,2	16,2	(+/-) 0,3
3	Длина донышка	18,3	19,3	(+/-) 0,2
4	Высота бортика	5,0	5,0	(+/-) 0,2
5	Длина завязок	31,7	31,7	(+/-) 0,5

Инструкция по применению на медицинское изделие

Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Инструкция
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA®
по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023

Изделие предназначено для соблюдения требований гигиены, защиты от возможного инфицирования опасными видами инфекции врачей и медицинских сестер и защиты пациента от внутрибольничной и внебольничной инфекции, которую персонал больницы может переносить на своей повседневной одежде.

Область применения – лечебные и лечебно-профилактические медицинские учреждения.

Показания к применению: для соблюдения требований гигиены, защиты от возможного инфицирования опасными видами инфекции врачей и медицинских сестер и защиты пациента от внутрибольничной и внебольничной инфекции, которую персонал больницы может переносить на своей повседневной одежде.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материала.

Побочные эффекты: не выявлены

Меры предосторожности:

Изделия должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов, не должны подвергаться воздействию масел, растворителей и других агрессивных веществ, разрушающих ткань.

Не использовать изделие при наличии видимых дефектов: повреждении поверхности, механических повреждений и т.п.

Материалы изготовления: Ткань «Люкс 120» (ТИСИ), «Сатори», «AYMAN».

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Способ применения:

Вскройте упаковку.

Достаньте изделие

Если необходимо, проведите автоклавирование

Наденьте изделие

Рекомендации по уходу:

Перед началом чистки изделия необходимо ознакомиться с изображениями на ярлыке изделия.

Для стирки изделий из цветной ткани и цветным кантом категорически запрещается использование стиральных порошков с отбеливателем.

Гладить одежду нужно только с изнанки, чтобы избежать блеска.

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 527 из 529

Перед стиркой одежды так же необходимо удостовериться в том, что фурнитура надежно закреплена и не повредилась при носке.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование изделия может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности до 100%).

Условия хранения изделия в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °C и относительной влажности до 98%).

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.3684-21.

Изделие, не загрязненное биологической жидкостью после использования, относится к медицинским отходам класса А – эпидемиологически безопасные отходы, согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Изделие, загрязненное биологической жидкостью после использования, относится к медицинским отходам класса Б – эпидемиологически опасные отходы, согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованное изделие так же подлежит утилизации как отходы класса А в случаях:

- окончания срока годности;
- повреждений, свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок годности – 4 года.

Инструкция по применению на медицинское изделие
Комплект одежды медицинской многоразового использования LINESTA® по ТУ 14.12.30-002-11903952-2023, ред.2

Страница 528 из 529

Срок эксплуатации изделий – 3 года.

Производитель

**ООО "МедЛайн", 644027, Омская область, г. Омск, ул. Индустриальная 1-я, д. 4,
корп. 3, оф. 305**

Телефон: 7 (3812) 53-65-37, info@medline-rus.ru

Прошито 529 листов

Управляющий – индивидуальный
предприниматель

/Чернобаев В.В./

