

Утверждаю



Директор
ООО «Фарм-Медик»
Е.В. Зайончковский
20.06.2024 г.

Этикетка медицинского изделия

**Средство перевязочное гемостатическое «БЫСТРОСПАС»,
стерильное по ТУ 21.20.24 – 004 – 98448790 – 2022**

Маркировка индивидуальной упаковки
Лицевая сторона

Средство перевязочное гемостатическое «БЫСТРОСПАС», стерильное по ТУ 21.20.24 – 004 – 98448790 – 2022
Средство перевязочное гемостатическое «БЫСТРОСПАС», стерильное, в гранулах, расфасованное по: ____ г

Назначение:

Остановка наружного кровотечения различной интенсивности, в том числе при повреждении крупных венозных сосудов.

В условиях стационара - для остановки кровотечения из паренхиматозных органов.

Стерильно. Нетоксично.

STERILE R

Не применять по истечении срока годности

Номер партии:

Дата стерилизации:

Указаны на шве упаковки.

масса нетто гранул, г _____

Маркировка индивидуальной упаковки

Оборотная сторона


«БЫСТРОСПАС» представляет собой перевязочное средство в гранулах на основе Каолина, Натрий-Карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и Аминокaproновой кислоты 5%, обладающих сочетанной адсорбирующей и коагулирующей способностью.

Меры предосторожности:

- Изделие имеет особенности использования! Применять только после ознакомления с инструкцией.
- При использовании необходимо беречь от попадания в глаза, в нос, в рот, при попадании промыть обильным количеством воды.
- При использовании необходимо беречь от попадания внутрь, при попадании немедленно выпить два или более стакана воды;
- Только для однократного применения;
- При нарушении герметичности упаковки для использования не годен (возможно увеличение объема пакета при увеличении температуры, при этом герметичность не нарушается, качество изделия не ухудшается)

Способ применения:

1. Перед применением «БЫСТРОСПАС», рану очищают от инородных тел, сгустков крови (пиктограмма 1).
Способ очистки ран от инородных тел, сгустков крови: очистку ран от инородных тел, сгустков крови проводят при помощи механической и химической антисептики: туалет раны (механическое удаление инородных тел, сгустков крови) с обработкой раны при помощи растворов химических антисептиков.
 2. Вскройте упаковку. Упаковку «БЫСТРОСПАС» необходимо вскрывать непосредственно перед применением изделия, повторному использованию не подлежит. При нарушении герметичности упаковки для использования не годен из-за быстрого влагонасыщения.
 3. Далее:
 - гранулы «БЫСТРОСПАС» засыпают в полость раны (пиктограмма 2); и после заполнения полости раны, сверху накладывают ватно-марлевый тампон, и осуществляют ручную компрессию в течении 5-7 мин (пиктограмма 3);
 - 4. При неэффективном гемостазе необходимо извлечь изделие из раны и:
 - повторно засыпать гранулы «БЫСТРОСПАС», из другой упаковки и далее осуществлять механическую компрессию и наложить кровоостанавливающий жгут (в зависимости от места травмы) (пиктограмма 4).
 - 5. Для остановки кровотечения при использовании гранул «БЫСТРОСПАС», тампон необходимо зафиксировать турами бинта, наложив давящую бинтовую повязку.
 - 6. При повреждении конечности, ее целесообразно иммобилизовать, для снижения риска повторного кровотечения.
- * Изделие необходимо полностью удалить при первичной хирургической обработке, время нахождения в ране не более 24 часов. Изделие извлекается из раны механически и путем промывания водными растворами, используемыми для промывания ран.
- ** При глубоких ранах необходимо внесение изделия в область поврежденных сосудов, т.к. при поверхностном нанесении изделия кровотечение будет продолжаться.
- *** Применение изделия, при использовании в условиях стационара для остановки кровотечения из parenхиматозных органов, проводит у применения" п. 1-5.

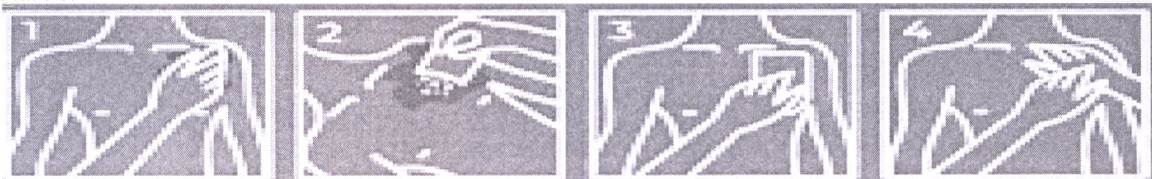

Хранить в сухом, защищенном от прямого попадания солнечного света месте, в условиях хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69, при температуре воздуха: от +40°C до - 50 °C, относительной влажности воздуха не более 98 %.

Транспортировать в сухом, защищенном от прямого попадания солнечного света месте, в условиях хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69, температуры воздуха: от +40°C до - 50 °C, относительной влажности воздуха не более 98 %. Транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Эксплуатировать при УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69, предельное рабочее значение температуры воздуха: от +1°C до + 40 °C.

Противопоказания к применению: аллергическая реакция на компоненты

Утилизация: в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 как относящееся к медицинским отходам "класса Б".

Неиспользованные изделия с истекшим сроком годности, а также неиспользованное из-за нарушения целостности упаковки утилизируют в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 как относящееся к медицинским отходам "класса А".

ТУ 21.20.24-004-98448790-2022 Срок годности: 5 лет с даты стерилизации.

ООО «Фарм-Медик», 150003, Ярославская область, г.о. город Ярославль, г Ярославль, пр-кт Октября, зд. 78, офис 7, литер ч

Адрес производства: г. Ярославль, пр-т Октября, зд. 78, лит. Ч, 1 этаж

Тел.: +7(4852)67-92-63 | info@farm-medic.com | farm-medic.com

Средство перевязочное гемостатическое «БЫСТРОСПАС», стерильное по ТУ 21.20.24 – 004 – 98448790 – 2022

Средство перевязочное гемостатическое «БЫСТРОСПАС», стерильное, в гранулах, расфасованное по: ____ г

Штрих-код



Маркировка транспортной упаковки

ООО «Фарм-Медик»

150003, Ярославская область, г.о. город Ярославль, г Ярославль, пр-кт Октября, зд. 78, офис 7, литер ч

Тел.: +7(4852)67-92-63

масса нетто гранул, г 1 пакет: _____

масса брутто: _____

количество уп.: _____

номер партии: _____

дата стерилизации: _____

срок годности: 5 лет с даты стерилизации

Хранить в сухом, защищенном от прямого попадания солнечного света месте, в условиях хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69, при температуре воздуха: от +40°C до - 50 °C, относительной влажности воздуха не более 98 %.


Транспортировать в сухом, защищенном от прямого попадания солнечного света месте, в условиях хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69, температуры воздуха: от +40°C до - 50 °C, относительной влажности воздуха не более 98 %. Транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Утилизация: в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 как относящееся к медицинским отходам "класса Б". Неиспользованные изделия с истекшим сроком годности, а также неиспользованное из-за нарушения целостности упаковки утилизируют в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 как относящееся к медицинским отходам "класса А".

не применять по истечении срока годности

Средство перевязочное гемостатическое «БЫСТРОСПАС», стерильное по ТУ 21.20.24 – 004 – 98448790 – 2022

Средство перевязочное гемостатическое «БЫСТРОСПАС», стерильное, в гранулах, расфасованное по: _____ г

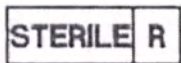

штрих-код

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 4

(таблетки)

листах



Утверждаю



Директор

ООО «Фарм-Медик»

Е.В. Зайончковский

20.06.2024 г.

Упаковочный лист медицинского изделия

**Средство перевязочное гемостатическое «БЫСТРОСПАС»,
стерильное по ТУ 21.20.24 – 004 – 98448790 – 2022**

ООО «Фарм-Медик»

150003, Ярославская область, г.о. город Ярославль, г Ярославль, пр-кт Октября, зд. 78, офис 7, литер ч
Тел.: +7(4852)67-92-63

Упаковочный лист

масса нетто гранул, г 1 пакет: _____

количество уп.: _____

номер партии: _____

дата стерилизации: _____

срок годности: 5 лет с даты стерилизации

номер упаковщика-контролера: _____

Средство перевязочное гемостатическое «БЫСТРОСПАС», стерильное по ТУ 21.20.24 – 004 – 98448790 – 2022
Средство перевязочное гемостатическое «БЫСТРОСПАС», стерильное, в гранулах, расфасованное по: _____ г



Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 2

(двух)

листах



Утверждаю



Директор

ООО «Фарм-Медик»

Е.В. Зайончковский

20.06.2024 г.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

**Средство перевязочное гемостатическое «БЫСТРОСПАС»,
стерильное по ТУ 21.20.24 – 004 – 98448790 – 2022**



Фото Средство перевязочное гемостатическое «БЫСТРОСПАС», стерильное по ТУ 21.20.24 – 004 – 98448790 – 2022
Средство перевязочное гемостатическое «БЫСТРОСПАС», стерильное, в гранулах, на примере - расфасованное по: 50 г.

Средство перевязочное гемостатическое «БЫСТРОСПАС», стерильное по ТУ
21.20.24-00-98448790-2022

СРЕДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ

БЫСТРОСПАС


СТЕРИЛЬНО В ГРАНУЛАХ РАСФАСОВАННОЕ ПО 50 г

НАЗНАЧЕНИЕ:

Остановка наружного кровотечения различной интенсивности, в том числе при повреждении крупных венозных сосудов.

В условиях стационара - для остановки кровотечения из паренхиматозных органов.

СТЕРИЛЬНО
НЕТОКСИЧНО

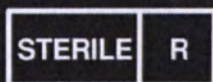

Не применять по истечении
срока годности

Номер партии:
Дата стерилизации:

Указаны на шве упаковки.

МАССА
НЕТТО
50 гр.

4 20.03.2023

Фото Средство перевязочное гемостатическое «БЫСТРОСПАС», стерильное по ТУ 21.20.24 – 004 – 98448790 – 2022
Средство перевязочное гемостатическое «БЫСТРОСПАС», стерильное, в гранулах, на примере - расфасованное по: 50 г.
Индивидуальная упаковка (лицевая сторона)

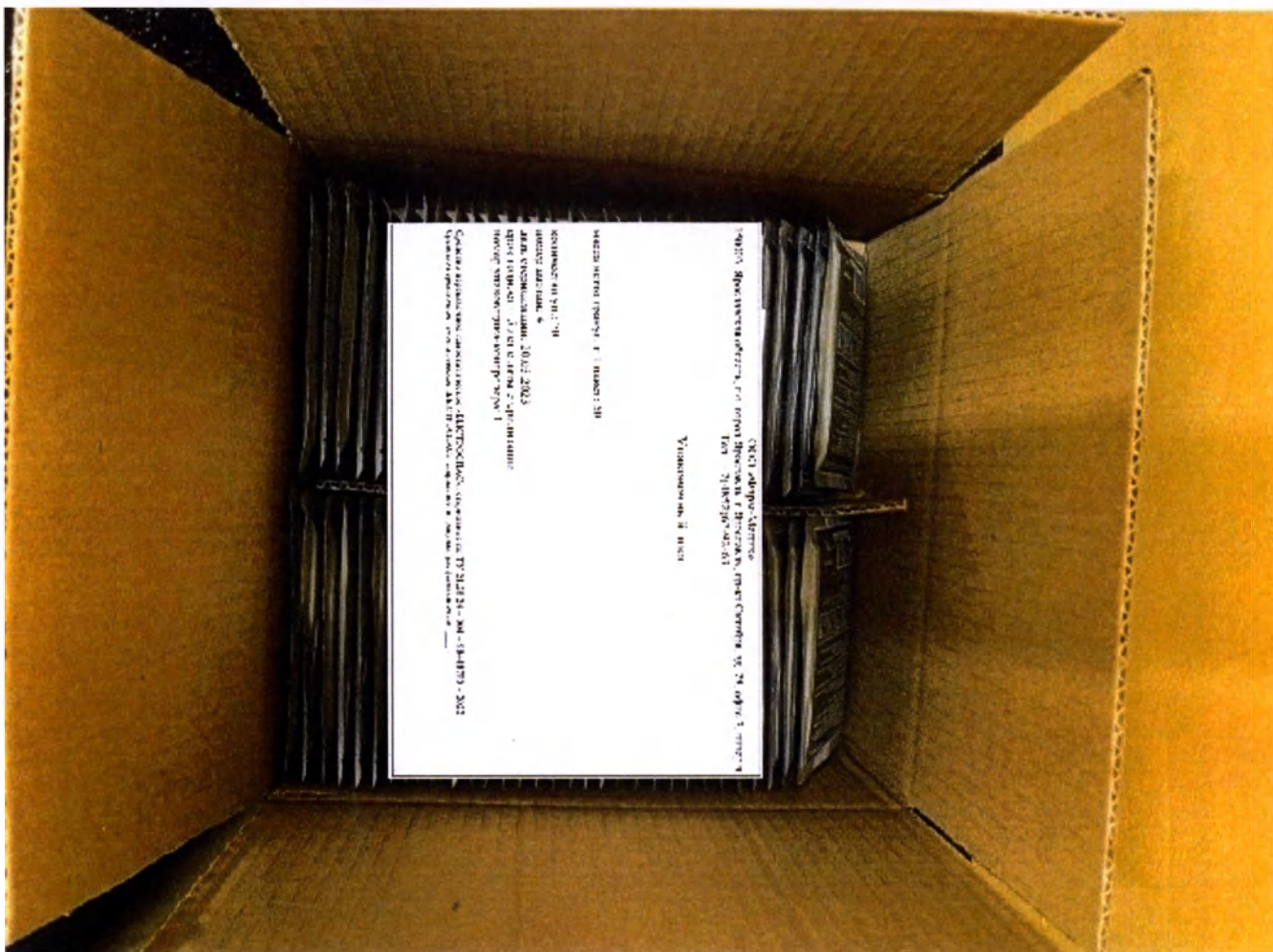


Фото Средство перевязочное гемостатическое «БЫСТРОСПАС», стерильное по ТУ 21.20.24 – 004 – 98448790 – 2022
 Средство перевязочное гемостатическое «БЫСТРОСПАС», стерильное, в гранулах, на примере - расфасованное по: 50 г.
 Упаковочный лист

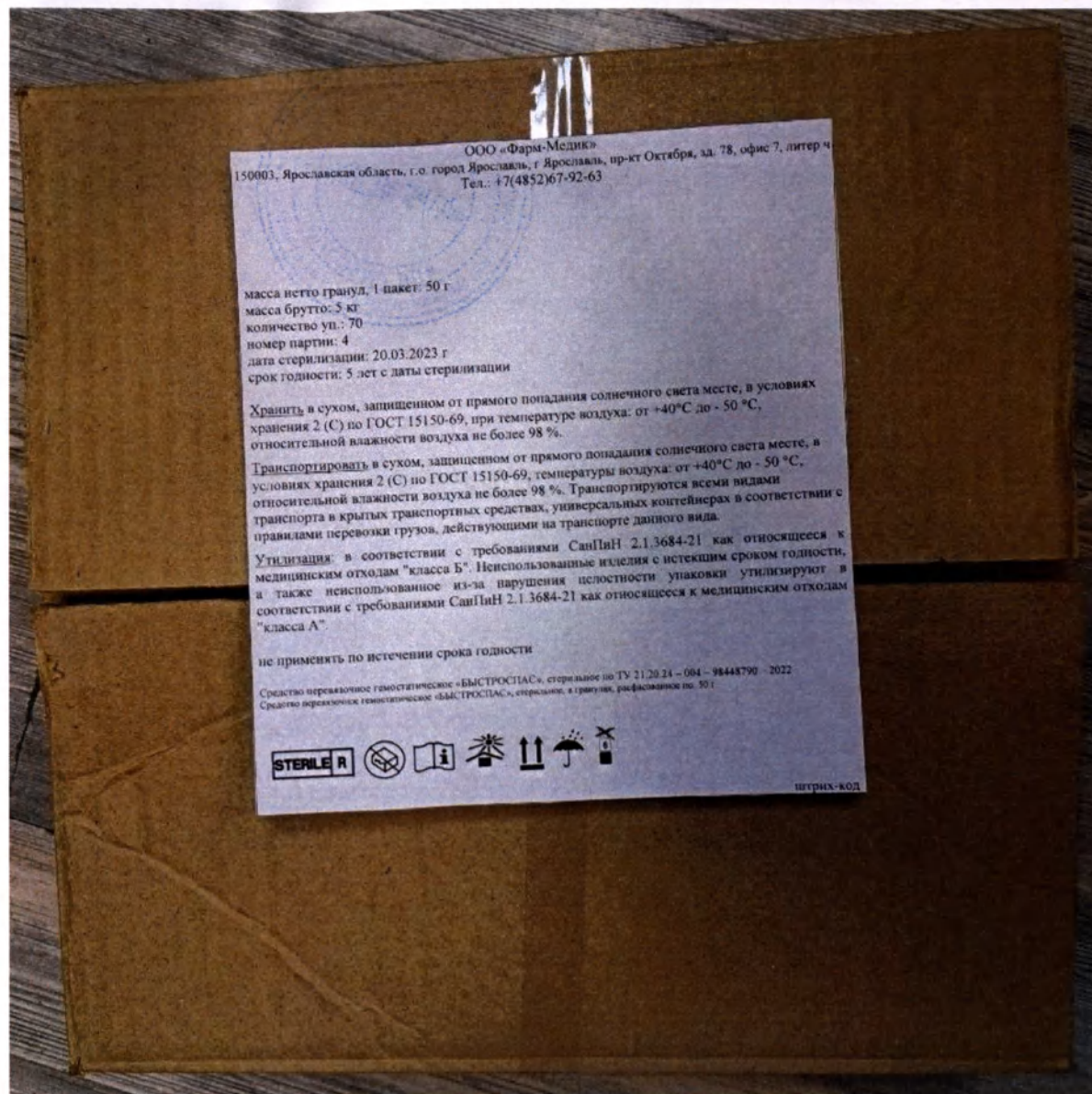


Фото Средство перевязочное гемостатическое «БЫСТРОСПАС», стерильное по ТУ 21.20.24 – 004 – 98448790 – 2022
 Средство перевязочное гемостатическое «БЫСТРОСПАС», стерильное, в гранулах, на примере - расфасованное по: 50 г.
 Транспортная упаковка

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 6

(шесть)

листах

