

108021 nuf

SIMPLADENT®

«I certify»

«Я утверждаю»

«04» May 2024

CEO Dr. Stefan Ihde

Др. Стефан Иде
Генеральный Директор

Simpladent GmbH
(Симпладент ГмбХ)

INSTRUCTIONS FOR USE
FOR THE MEDICAL DEVICE
One-stage implants Simpladent

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
Имплантаты одноэтапные Simpladent

2024

Simpladent GmbH
Dorfplatz 11
CH-8737 Gommiswald
Tel. +41 (0)55 293 23 70
www.simpladent.ch
info@simpladent.ch
UID: CHE-175 160 208

Zahlungsverbindung
Raiffeisenbank Benken
CHF IBAN CH97 8080 8008 9859 2810 5
EUR IBAN CH94 8080 8006 9613 3271 3
BIC/SWIFT RAIFCH22C56



ISO 13485:2015 CERTIFIED

Unterschrift in Anwesenheit

Art. 11 Abs. 1

Amtliche Beglaubigung

Die Echtheit der vorstehenden und vor mir angebrachten Unterschrift von

Dr., Ihde, Stefan Klaus Alfred, 24.07.1962, männlich, Deutschland

Titel, Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit

8737 Gommiswald, Dorfplatz 11 (Polit. Gemeinde Gommiswald SG)

PLZ, Ort, Adresse

wird hiermit amtlich beglaubigt.

Die Person hat folgenden Ausweis vorgelegt:

Personalausweis, Nr. L4VK7380T, Ausstellungsort: Botschaft Belgrad

8737 Gommiswald, 4. Mai 2024



Einwohneramt Gommiswald

Die Leiterin-Stv.:

Nadia Kessler



Kontr. Nr.

757 in Legalisationskontrolle

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Имплантаты одноэтапные Simpladent

2024

СОДЕРЖАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	3
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ (ИЗГОТОВИТЕЛЕ).....	18
КОМПЛЕКТНОСТЬ	18
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	19
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ	19
ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ ...	19
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	19
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	20
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	20
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	21
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.....	21
СТЕРИЛЬНОСТЬ	21
СТЕРИЛИЗАЦИЯ, МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ.....	21
ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	21
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКЕ ГОДНОСТИ.....	52
ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ.....	52
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	52
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	52
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.....	52
УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ	52
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.....	53
ТАБЛИЦА РАСШИФРОВКИ СИМВОЛОВ, НАНЕСЕННЫХ НА МАРКИРОВКУ	53
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ	54

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Имплантаты одноэтапные Simpladent, варианты исполнения:

I. Имплантаты одноэтапные BECES, в составе:

- 1.1 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 2.7 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (BECES 2.7 10, Implant, Ti6Al4V): 13-900190 - 1 шт;
- 1.2 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 2.7 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (BECES 2.7 12, Implant, Ti6Al4V): 13-900191 - 1 шт;
- 1.3 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 2.7 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (BECES 2.7 14, Implant, Ti6Al4V): 13-900192 - 1 шт;
- 1.4 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 2.7 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (BECES 2.7 17, Implant, Ti6Al4V): 13-900193 - 1 шт;
- 1.5 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 2.7 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (BECES 2.7 20, Implant, Ti6Al4V): 13-900194 - 1 шт;
- 1.6 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 2.7 мм, длина 23 мм, Ti6Al4V (BECES 2.7 23, Implant, Ti6Al4V): 13-900195 - 1 шт;
- 1.7 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 2.7 мм, длина 26 мм, Ti6Al4V (BECES 2.7 26, Implant, Ti6Al4V): 13-900196 - 1 шт;
- 1.8 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 2.7 мм, длина 29 мм, Ti6Al4V (BECES 2.7 29, Implant, Ti6Al4V): 13-900197 - 1 шт;
- 1.9 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 2.7 мм, длина 32 мм, Ti6Al4V (BECES 2.7 32, Implant, Ti6Al4V): 13-900198 - 1 шт;
- 1.10 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.0 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (BECES 3.0 10, Implant, Ti6Al4V): 13-900480 - 1 шт;
- 1.11 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.0 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (BECES 3.0 12, Implant, Ti6Al4V): 13-900481 - 1 шт;
- 1.12 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.0 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (BECES 3.0 14, Implant, Ti6Al4V): 13-900482 - 1 шт;
- 1.13 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.0 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (BECES 3.0 17, Implant, Ti6Al4V): 13-900483 - 1 шт;
- 1.14 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.0 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (BECES 3.0 20, Implant, Ti6Al4V): 13-900484 - 1 шт;
- 1.15 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.0 мм, длина 23 мм, Ti6Al4V (BECES 3.0 23, Implant, Ti6Al4V): 13-900485 - 1 шт;
- 1.16 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.0 мм, длина 26 мм, Ti6Al4V (BECES 3.0 26, Implant, Ti6Al4V): 13-900486 - 1 шт;
- 1.17 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.0 мм, длина 29 мм, Ti6Al4V (BECES 3.0 29, Implant, Ti6Al4V): 13-900487 - 1 шт;
- 1.18 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.0 мм, длина 32 мм, Ti6Al4V (BECES 3.0 32, Implant, Ti6Al4V): 13-900488 - 1 шт;
- 1.19 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.5 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (BECES 3.5 10, Implant, Ti6Al4V): 13-900208 - 1 шт;
- 1.20 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.5 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (BECES 3.5 12, Implant, Ti6Al4V): 13-900226 - 1 шт;
- 1.21 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.5 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (BECES 3.5 14, Implant, Ti6Al4V): 13-900210 - 1 шт;
- 1.22 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.5 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (BECES 3.5 17, Implant, Ti6Al4V): 13-900211 - 1 шт;
- 1.23 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.5 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (BECES 3.5 20, Implant, Ti6Al4V): 13-900212 - 1 шт;

- 1.24 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.5 мм, длина 23 мм, Ti6Al4V (BECES 3.5 23, Implant, Ti6Al4V): 13-900213 - 1 шт;
- 1.25 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.5 мм, длина 26 мм, Ti6Al4V (BECES 3.5 26, Implant, Ti6Al4V): 13-900214 - 1 шт;
- 1.26 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.5 мм, длина 29 мм, Ti6Al4V (BECES 3.5 29, Implant, Ti6Al4V): 13-900215 - 1 шт;
- 1.27 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.5 мм, длина 32 мм, Ti6Al4V (BECES 3.5 32, Implant, Ti6Al4V): 13-900216 - 1 шт;
- 1.28 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.5 мм, длина 35 мм, Ti6Al4V (BECES 3.5 35, Implant, Ti6Al4V): 13-900217 - 1 шт;
- 1.29 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.5 мм, длина 38 мм, Ti6Al4V (BECES 3.5 38, Implant, Ti6Al4V): 13-900218 - 1 шт;
- 1.30 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 4.5 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (BECES 4.5 14, Implant, Ti6Al4V): 13-900220 - 1 шт;
- 1.31 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 4.5 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (BECES 4.5 17, Implant, Ti6Al4V): 13-900221 - 1 шт;
- 1.32 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 4.5 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (BECES 4.5 20, Implant, Ti6Al4V): 13-900222 - 1 шт;
- 1.33 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 4.5 мм, длина 23 мм, Ti6Al4V (BECES 4.5 23, Implant, Ti6Al4V): 13-900223 - 1 шт;
- 1.34 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 4.5 мм, длина 26 мм, Ti6Al4V (BECES 4.5 26, Implant, Ti6Al4V): 13-900224 - 1 шт;
- 1.35 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 4.5 мм, длина 29 мм, Ti6Al4V (BECES 4.5 29, Implant, Ti6Al4V): 13-900225 - 1 шт;
- 1.36 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 5.5 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (BECES 5.5 12, Implant, Ti6Al4V): 13-900250 - 1 шт;
- 1.37 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 5.5 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (BECES 5.5 14, Implant, Ti6Al4V): 13-900251 - 1 шт;
- 1.38 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 5.5 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (BECES 5.5 17, Implant, Ti6Al4V): 13-900252 - 1 шт;
- 1.39 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 5.5 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (BECES 5.5 20, Implant, Ti6Al4V): 13-900253 - 1 шт;
- 1.40 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 5.5 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (BECES 5.5 8, Implant, Ti6Al4V): 13-900255 - 1 шт;
- 1.41 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 7 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (BECES 7 8 Implant, Ti6Al4V): 13-900258 - 1 шт;
- 1.42 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 7 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (BECES 7 12, Implant, Ti6Al4V): 13-900260 - 1 шт;
- 1.43 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 7 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (BECES 7 14, Implant, Ti6Al4V): 13-900261 - 1 шт;
- 1.44 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 7 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (BECES 7 17, Implant, Ti6Al4V): 13-900262 - 1 шт;
- 1.45 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 7 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (BECES 7 20, Implant, Ti6Al4V): 13-900263 - 1 шт;
- 1.46 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 5.5 мм, длина 23 мм, Ti6Al4V (BECES 5.5 23, Implant, Ti6Al4V): 13-900265 - 1 шт;
- 1.47 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 5.5 мм, длина 26 мм, Ti6Al4V (BECES 5.5 26, Implant, Ti6Al4V): 13-900266 - 1 шт;
- 1.48 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 5.5 мм, длина 29 мм, Ti6Al4V (BECES 5.5 29, Implant, Ti6Al4V): 13-900267 - 1 шт;
- 1.49 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 9 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (BECES 9 8, Implant, Ti6Al4V): 13-900269 - 1 шт;

- 1.50 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 9 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (BECES 9 10 Implant, Ti6Al4V): 13-900270 - 1 шт;
- 1.51 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 9 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (BECES 9 14 Implant, Ti6Al4V): 13-900271 - 1 шт;
- 1.52 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 12 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (BECES 12 10 Implant, Ti6Al4V): 13-900272 - 1 шт;
- 1.53 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 12 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (BECES 12 14 Implant, Ti6Al4V): 13-900273 - 1 шт;
- 1.54 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 9 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (BECES 9 12 Implant, Ti6Al4V): 13-900274 - 1 шт;
- 1.55 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 12 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (BECES 12 12 Implant, Ti6Al4V): 13-900275 - 1 шт;
- 1.56 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 10.5 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (BECES 10.5 10 Implant, Ti6Al4V): 13-900276 - 1 шт;
- 1.57 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 10.5 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (BECES 10.5 12 Implant, Ti6Al4V): 13-900277 - 1 шт;
- 1.58 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 10.5 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (BECES 10.5 14 Implant, Ti6Al4V): 13-900278 - 1 шт;
- 1.59 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 12 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (BECES 12 8 Implant, Ti6Al4V): 13-900279 - 1 шт;
- 1.60 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 10.5 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (BECES 10.5 17 Implant, Ti6Al4V): 13-900280 - 1 шт;
- 1.61 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 5.5 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (BECES 5.5 10 Implant, Ti6Al4V): 13-900281 - 1 шт;
- 1.62 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 7 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (BECES 7 10 Implant, Ti6Al4V): 13-900282 - 1 шт;
- 1.63 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.6 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (BECES 3.6 12 Implant, Ti6Al4V): 13-900284 - 1 шт;
- 1.64 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.6 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (BECES 3.6 10 Implant, Ti6Al4V): 13-900285 - 1 шт;
- 1.65 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.6 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (BECES 3.6 14 Implant, Ti6Al4V): 13-900286 - 1 шт;
- 1.66 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.6 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (BECES 3.6 17 Implant, Ti6Al4V): 13-900287 - 1 шт;
- 1.67 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.6 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (BECES 3.6 20 Implant, Ti6Al4V): 13-900288 - 1 шт;
- 1.68 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.6 мм, длина 23 мм, Ti6Al4V (BECES 3.6 23 Implant, Ti6Al4V): 13-900289 - 1 шт;
- 1.69 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.6 мм, длина 26 мм, Ti6Al4V (BECES 3.6 26 Implant, Ti6Al4V): 13-900290 - 1 шт;
- 1.70 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.6 мм, длина 29 мм, Ti6Al4V (BECES 3.6 29 Implant, Ti6Al4V): 13-900291 - 1 шт;
- 1.71 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 4.6 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (BECES 4.6 10 Implant, Ti6Al4V): 13-900292 - 1 шт;
- 1.72 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 4.6 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (BECES 4.6 14 Implant, Ti6Al4V): 13-900293 - 1 шт;
- 1.73 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 4.6 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (BECES 4.6 17 Implant, Ti6Al4V): 13-900294 - 1 шт;
- 1.74 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 4.6 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (BECES 4.6 20 Implant, Ti6Al4V): 13-900295 - 1 шт;
- 1.75 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 4.6 мм, длина 23 мм, Ti6Al4V (BECES 4.6 23 Implant, Ti6Al4V): 13-900296 - 1 шт;

- 1.76 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 4.6 мм, длина 26 мм, Ti6Al4V (BECES 4.6 26 Implant, Ti6Al4V): 13-900297 - 1 шт;
 - 1.77 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 4.6 мм, длина 29 мм, Ti6Al4V (BECES 4.6 29 Implant, Ti6Al4V): 13-900298 - 1 шт;
 - 1.78 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 4.6 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (BECES 4.6 8 Implant, Ti6Al4V): 13-900299 - 1 шт;
 - 1.79 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 4.6 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (BECES 4.6 12 Implant, Ti6Al4V): 13-900300 - 1 шт;
 - 1.80 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.6 мм, длина 32 мм, Ti6Al4V (BECES 3.6 32, Implant, Ti6Al4V): 13-900450 - 1 шт;
 - 1.81 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 3.6 мм, длина 35 мм, Ti6Al4V (BECES 3.6 35, Implant, Ti6Al4V): 13-900451 - 1 шт;
 - 1.82 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 4.6 мм, длина 32 мм, Ti6Al4V (BECES 4.6 32, Implant, Ti6Al4V): 13-900453 - 1 шт;
 - 1.83 Имплантат одноэтапный BECES диаметр 4.6 мм, длина 35 мм, Ti6Al4V (BECES 4.6 35, Implant, Ti6Al4V): 13-900454 - 1 шт;
2. Наклейки для пациента – 2 шт.
 3. Инструкция по применению – 1 шт.

II. Имплантаты одноэтапные BECES MU, в составе:

- 1.1 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 3.6 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (BECES MU 3.6 14 Implant, Ti6Al4V): 13-900330 - 1 шт;
- 1.2 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 3.6 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (BECES MU 3.6 17 Implant, Ti6Al4V): 13-900331 - 1 шт;
- 1.3 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 3.6 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (BECES MU 3.6 20 Implant, Ti6Al4V): 13-900332 - 1 шт;
- 1.4 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 3.6 мм, длина 23 мм, Ti6Al4V (BECES MU 3.6 23 Implant, Ti6Al4V): 13-900333 - 1 шт;
- 1.5 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 5.5 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (BECES MU 5.5 10 Implant, Ti6Al4V): 13-900334 - 1 шт;
- 1.6 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 5.5 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (BECES MU 5.5 12 Implant, Ti6Al4V): 13-900335 - 1 шт;
- 1.7 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 5.5 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (BECES MU 5.5 14 Implant, Ti6Al4V): 13-900336 - 1 шт;
- 1.8 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 5.5 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (BECES MU 5.5 17 Implant, Ti6Al4V): 13-900357 - 1 шт;
- 1.9 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 5.5 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (BECES MU 5.5 20 Implant, Ti6Al4V): 13-900358 - 1 шт;
- 1.10 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 7.0 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (BECES MU 7.0 10 Implant, Ti6Al4V): 13-900337 - 1 шт;
- 1.11 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 7.0 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (BECES MU 7.0 12 Implant, Ti6Al4V): 13-900338 - 1 шт;
- 1.12 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 3.6 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (BECES MU 3.6 12 Implant, Ti6Al4V): 13-900376 - 1 шт;
- 1.13 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 3.6 мм, длина 26 мм, Ti6Al4V (BECES MU 3.6 26 Implant, Ti6Al4V): 13-900377 - 1 шт;
- 1.14 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 3.6 мм, длина 29, Ti6Al4V (BECES MU 3.6 29 Implant, Ti6Al4V): 13-900378 - 1 шт;
- 1.15 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 3.6 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (BECES MU 3.6 8 Implant, Ti6Al4V): 13-900397 - 1 шт;

- 1.16 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 3.6 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (BECES MU 3.6 10 Implant, Ti6Al4V): 13-900398 - 1 шт;
- 1.17 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 4.6 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (BECES MU 4.6 8 Implant, Ti6Al4V): 13-900379 - 1 шт;
- 1.18 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 4.6 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (BECES MU 4.6 10 Implant, Ti6Al4V): 13-900380 - 1 шт;
- 1.19 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 4.6 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (BECES MU 4.6 12 Implant, Ti6Al4V): 13-900381 - 1 шт;
- 1.20 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 4.6 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (BECES MU 4.6 14 Implant, Ti6Al4V): 13-900382 - 1 шт;
- 1.21 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 4.6 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (BECES MU 4.6 17 Implant, Ti6Al4V): 13-90038 - 1 шт;
- 1.22 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 4.6 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (BECES MU 4.6 20 Implant, Ti6Al4V): 13-900384 - 1 шт;
- 1.23 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 4.6 мм, длина 23 мм, Ti6Al4V (BECES MU 4.6 23 Implant, Ti6Al4V): 13-900385 - 1 шт;
- 1.24 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 4.6 мм, длина 26 мм, Ti6Al4V (BECES MU 4.6 26 Implant, Ti6Al4V): 13-900386 - 1 шт;
- 1.25 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 4.6 мм, длина 29 мм, Ti6Al4V (BECES MU 4.6 29 Implant, Ti6Al4V): 13-900387 - 1 шт;
- 1.26 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 4.6 мм, длина 32 мм, Ti6Al4V (BECES MU 4.6 32 Implant, Ti6Al4V): 13-900388 - 1 шт;
- 1.27 Имплантат одноэтапный BECES MU диаметр 4.6 мм, длина 35 мм, Ti6Al4V (BECES MU 4.6 35 Implant, Ti6Al4V): 13-900389 - 1 шт;

2. Инструкция по применению – 1 шт.

III. Имплантаты одноэтапные BECES EX, в составе:

- 1.1 Имплантат одноэтапный BECES EX с утолщением диаметр 3.5 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (BECES EX 3.5+ 12 Implant, Ti6Al4V): 13-420150 - 1 шт;
- 1.2 Имплантат одноэтапный BECES EX с утолщением диаметр 3.5 мм, длина 15 мм, Ti6Al4V (BECES EX 3.5+ 15 Implant, Ti6Al4V): 13-420151 - 1 шт;
- 1.3 Имплантат одноэтапный BECES EX с утолщением диаметр 3.5 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (BECES EX 3.5+ 17 Implant, Ti6Al4V): 13-420152 - 1 шт;
- 1.4 Имплантат одноэтапный BECES EX с утолщением диаметр 3.5 мм, длина 19 мм, Ti6Al4V (BECES EX 3.5+ 19 Implant, Ti6Al4V): 13-420153 - 1 шт;
- 1.5 Имплантат одноэтапный BECES EX с утолщением диаметр 3.5 мм, длина 21 мм, Ti6Al4V (BECES EX 3.5+ 21 Implant, Ti6Al4V): 13-420154 - 1 шт;
- 1.6 Имплантат одноэтапный BECES EX с утолщением диаметр 3.5 мм, длина 23 мм, Ti6Al4V (BECES EX 3.5+ 23 Implant, Ti6Al4V): 13-420155 - 1 шт;
- 1.7 Имплантат одноэтапный BECES EX с утолщением диаметр 3.5 мм, длина 26 мм, Ti6Al4V (BECES EX 3.5+ 26 Implant, Ti6Al4V): 13-420156 - 1 шт;
- 1.8 Имплантат одноэтапный BECES EX с утолщением диаметр 3.5 мм, длина 29 мм, Ti6Al4V (BECES EX 3.5+ 29 Implant, Ti6Al4V): 13-420157 - 1 шт;
- 1.9 Имплантат одноэтапный BECES EX с утолщением диаметр 4.1 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (BECES EX 4.1+ 12 Implant, Ti6Al4V): 13-420160 - 1 шт;
- 1.10 Имплантат одноэтапный BECES EX с утолщением диаметр 4.1 мм, длина 15 мм, Ti6Al4V (BECES EX 4.1+ 15 Implant, Ti6Al4V): 13-420161 - 1 шт;
- 1.11 Имплантат одноэтапный BECES EX с утолщением диаметр 4.1 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (BECES EX 4.1+ 17 Implant, Ti6Al4V): 13-420162 - 1 шт;

- 1.12 Имплантат одноэтапный BECES EX с утолщением диаметр 4.1 мм, длина 19 мм, Ti6Al4V (BECES EX 4.1+ 19 Implant, Ti6Al4V): 13-420163 - 1 шт;
- 1.13 Имплантат одноэтапный BECES EX с утолщением диаметр 4.1 мм, длина 21 мм, Ti6Al4V (BECES EX 4.1+ 21 Implant, Ti6Al4V): 13-420164 - 1 шт;
- 1.14 Имплантат одноэтапный BECES EX с утолщением диаметр 4.1 мм, длина 23 мм, Ti6Al4V (BECES EX 4.1+ 23 Implant, Ti6Al4V): 13-420165 - 1 шт.

2. Наклейки для пациента – 2 шт.

3. Инструкция по применению – 1 шт.

IV. Имплантаты одноэтапные ZDI, в составе:

- 1.1 Имплантат одноэтапный ZDI диаметр 4.6 мм, длина 35 мм, Ti6Al4V (ZDI 4.6 35 Implant, Ti6Al4V): 13-900100 – 1 шт;
- 1.2 Имплантат одноэтапный ZDI диаметр 4.6 мм, длина 37.5 мм, Ti6Al4V (ZDI 4.6 37.5 Implant, Ti6Al4V): 13-900101 – 1 шт;
- 1.3 Имплантат одноэтапный ZDI диаметр 4.6 мм, длина 40 мм, Ti6Al4V (ZDI 4.6 40 Implant, Ti6Al4V): 13-900102 – 1 шт;
- 1.4 Имплантат одноэтапный ZDI диаметр 4.6 мм, длина 42.5 мм, Ti6Al4V (ZDI 4.6 42.5 Implant, Ti6Al4V): 13-900103 – 1 шт;
- 1.5 Имплантат одноэтапный ZDI диаметр 4.6 мм, длина 45 мм, Ti6Al4V (ZDI 4.6 45 Implant, Ti6Al4V): 13-900104 – 1 шт;
- 1.6 Имплантат одноэтапный ZDI диаметр 4.6 мм, длина 47.5 мм, Ti6Al4V (ZDI 4.6 47.5 Implant, Ti6Al4V): 13-900105 – 1 шт;
- 1.7 Имплантат одноэтапный ZDI диаметр 4.6 мм, длина 50 мм, Ti6Al4V (ZDI 4.6 50 Implant, Ti6Al4V): 13-900106 – 1 шт;
- 1.8 Имплантат одноэтапный ZDI диаметр 4.6 мм, длина 52.5 мм, Ti6Al4V (ZDI 4.6 52.5 Implant, Ti6Al4V): 13-900107 – 1 шт;
- 1.9 Имплантат одноэтапный ZDI диаметр 4.6 мм, длина 55 мм, Ti6Al4V (ZDI 4.6 55 Implant, Ti6Al4V): 13-900108 – 1 шт.

2. Инструкция по применению – 1 шт.

V. Имплантаты одноэтапные ZDI2, в составе:

- 1.1 Имплантат одноэтапный ZDI2 диаметр 4.6 мм, длина 35 мм, Ti6Al4V (ZDI2 4.6 35 Implant, Ti6Al4V): 13-900320 - 1 шт;
- 1.2 Имплантат одноэтапный ZDI2 диаметр 4.6 мм, длина 37.5 мм, Ti6Al4V (ZDI2 4.6 37.5 Implant, Ti6Al4V): 13-900321 - 1 шт;
- 1.3 Имплантат одноэтапный ZDI2 диаметр 4.6 мм, длина 40 мм, Ti6Al4V (ZDI2 4.6 40 Implant, Ti6Al4V): 13-900322 - 1 шт;
- 1.4 Имплантат одноэтапный ZDI2 диаметр 4.6 мм, длина 42.5 мм, Ti6Al4V (ZDI2 4.6 42.5 Implant, Ti6Al4V): 13-900323 - 1 шт;
- 1.5 Имплантат одноэтапный ZDI2 диаметр 4.6 мм, длина 45 мм, Ti6Al4V (ZDI2 4.6 45 Implant, Ti6Al4V): 13-900324 - 1 шт;
- 1.6 Имплантат одноэтапный ZDI2 диаметр 4.6 мм, длина 47.5 мм, Ti6Al4V (ZDI2 4.6 47.5 Implant, Ti6Al4V): 13-900325 - 1 шт;
- 1.7 Имплантат одноэтапный ZDI2 диаметр 4.6 мм, длина 50 мм, Ti6Al4V (ZDI2 4.6 50 Implant, Ti6Al4V): 13-900326 - 1 шт;
- 1.8 Имплантат одноэтапный ZDI2 диаметр 4.6 мм, длина 52.5 мм, Ti6Al4V (ZDI2 4.6 52.5 Implant, Ti6Al4V): 13-900327 - 1 шт;
- 1.9 Имплантат одноэтапный ZDI2 диаметр 4.6 мм, длина 55 мм, Ti6Al4V (ZDI2 4.6 55 Implant, Ti6Al4V): 13-900328 - 1 шт.

2. Инструкция по применению – 1 шт.

VI. Имплантаты одноэтапные KOC Classic, в составе:

- 1.1 Имплантат одноэтапный KOC Classic диаметр 3.7 мм, длина 6 мм, Ti6Al4V (KOC Classic 3.7 6 Implant, Ti6Al4V): 13-455106 - 1 шт;
- 1.2 Имплантат одноэтапный KOC Classic диаметр 3.7 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (KOC Classic 3.7 8 Implant, Ti6Al4V): 13-455107 - 1 шт;
- 1.3 Имплантат одноэтапный KOC Classic диаметр 3.0 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (KOC Classic 3.0 10 Implant, Ti6Al4V): 13-455108 - 1 шт;
- 1.4 Имплантат одноэтапный KOC Classic диаметр 3.0 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (KOC Classic 3.0 12 Implant, Ti6Al4V): 13-455109 - 1 шт;
- 1.5 Имплантат одноэтапный KOC Classic диаметр 3.0 мм, длина 15 мм, Ti6Al4V (KOC Classic 3.0 15 Implant, Ti6Al4V): 13-455110 - 1 шт;
- 1.6 Имплантат одноэтапный KOC Classic диаметр 3.2 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (KOC Classic 3.2 12 Implant, Ti6Al4V): 13-455111 - 1 шт;
- 1.7 Имплантат одноэтапный KOC Classic диаметр 3.2 мм, длина 15 мм, Ti6Al4V (KOC Classic 3.2 15 Implant, Ti6Al4V): 13-455112 - 1 шт;
- 1.8 Имплантат одноэтапный KOC Classic диаметр 3.7 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (KOC Classic 3.7 10 Implant, Ti6Al4V): 13-455114 - 1 шт;
- 1.9 Имплантат одноэтапный KOC Classic диаметр 3.7 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (KOC Classic 3.7 12 Implant, Ti6Al4V): 13-455115 - 1 шт;
- 1.10 Имплантат одноэтапный KOC Classic диаметр 3.7 мм, длина 15 мм, Ti6Al4V (KOC Classic 3.7 15 Implant, Ti6Al4V): 13-455120 - 1 шт;
- 1.11 Имплантат одноэтапный KOC Classic диаметр 4.1 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (KOC Classic 4.1 8 Implant, Ti6Al4V): 13-455129 - 1 шт;
- 1.12 Имплантат одноэтапный KOC Classic диаметр 4.1 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (KOC Classic 4.1 10 Implant, Ti6Al4V): 13-455130 - 1 шт;
- 1.13 Имплантат одноэтапный KOC Classic диаметр 4.1 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (KOC Classic 4.1 12 Implant, Ti6Al4V): 13-455132 - 1 шт;
- 1.14 Имплантат одноэтапный KOC Classic диаметр 4.1 мм, длина 15 мм, Ti6Al4V (KOC Classic 4.1 15 Implant, Ti6Al4V): 13-455135 - 1 шт;
- 1.15 Имплантат одноэтапный KOC Classic диаметр 4.1 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (KOC Classic 4.1 17 Implant, Ti6Al4V): 13-455136 - 1 шт;
- 1.16 Имплантат одноэтапный KOC Classic диаметр 4.1 мм, длина 19 мм, Ti6Al4V (KOC Classic 4.1 19 Implant, Ti6Al4V): 13-455137 - 1 шт;
- 1.17 Имплантат одноэтапный KOC Classic диаметр 5.0 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (KOC Classic 5.0 10 Implant, Ti6Al4V): 13-455171 - 1 шт;
- 1.18 Имплантат одноэтапный KOC Classic диаметр 5.0 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (KOC Classic 5.0 12 Implant, Ti6Al4V): 13-455172 - 1 шт;
- 1.19 Имплантат одноэтапный KOC Classic диаметр 5 мм, длина 15 мм, Ti6Al4V (KOC Classic 5 15, Ti6Al4V): 13-455173 - 1 шт.

2. Наклейки для пациента – 2 шт.

3. Инструкция по применению – 1 шт.

VII. Имплантаты одноэтапные KOC PLUS, в составе:

- 1.1 Имплантат одноэтапный KOC PLUS диаметр 3.7 мм, компрессионная часть 9 мм, полированная часть 3 мм, Ti6Al4V (KOC PLUS 3.7 9+3 Implant, Ti6Al4V): 13-455800 - 1 шт;

- 1.2 Имплантат одноэтапный KOC PLUS диаметр 3.7 мм, компрессионная часть 11 мм, полированная часть 3 мм, Ti6Al4V (KOC PLUS 3.7 11+3 Implant, Ti6Al4V): 13-455801 - 1 шт;
 - 1.3 Имплантат одноэтапный KOC PLUS диаметр 3.7 мм, компрессионная часть 13 мм, полированная часть 3 мм, Ti6Al4V (KOC PLUS 3.7 13+3 Implant, Ti6Al4V): 13-455802 - 1 шт;
 - 1.4 Имплантат одноэтапный KOC PLUS диаметр 3.7 мм, компрессионная часть 16 мм, полированная часть 3 мм, Ti6Al4V (KOC PLUS 3.7 16+3 Implant, Ti6Al4V): 13-455803 - 1 шт;
 - 1.5 Имплантат одноэтапный KOC PLUS диаметр 3.7 мм, компрессионная часть 20 мм, полированная часть 3 мм, Ti6Al4V (KOC PLUS 3.7 20+3 Implant, Ti6Al4V): 13-455804 - 1 шт;
 - 1.6 Имплантат одноэтапный KOC PLUS диаметр 3.7 мм, компрессионная часть 23 мм, полированная часть 3 мм, Ti6Al4V (KOC PLUS 3.7 23+3 Implant, Ti6Al4V): 13-455805 - 1 шт;
 - 1.7 Имплантат одноэтапный KOC PLUS диаметр 4.1 мм, компрессионная часть 6 мм, полированная часть 3 мм, Ti6Al4V (KOC PLUS 4.1 6+3 Implant, Ti6Al4V): 13-455810 - 1 шт;
 - 1.8 Имплантат одноэтапный KOC PLUS диаметр 4.1 мм, компрессионная часть 9 мм, полированная часть 3 мм, Ti6Al4V (KOC PLUS 4.1 9+3 Implant, Ti6Al4V): 13-455811 - 1 шт;
 - 1.9 Имплантат одноэтапный KOC PLUS диаметр 4.1 мм, компрессионная часть 11 мм, полированная часть 3 мм, Ti6Al4V (KOC PLUS 4.1 11+3 Implant, Ti6Al4V): 13-455812 - 1 шт;
 - 1.10 Имплантат одноэтапный KOC PLUS диаметр 4.1 мм, компрессионная часть 13 мм, полированная часть 3 мм, Ti6Al4V (KOC PLUS 4.1 13+3 Implant, Ti6Al4V): 13-455813 - 1 шт;
 - 1.11 Имплантат одноэтапный KOC PLUS диаметр 4.1 мм, компрессионная часть 20 мм, полированная часть 3 мм, Ti6Al4V (KOC PLUS 4.1 20+3 Implant, Ti6Al4V): 13-455814 - 1 шт;
 - 1.12 Имплантат одноэтапный KOC PLUS диаметр 4.1 мм, компрессионная часть 16 мм, полированная часть 3 мм, Ti6Al4V (KOC PLUS 4.1 16+3 Implant, Ti6Al4V): 13-455815 - 1 шт;
 - 1.13 Имплантат одноэтапный KOC PLUS диаметр 5.0 мм, компрессионная часть 6 мм, полированная часть 3 мм, Ti6Al4V (KOC PLUS 5.0 6+3 Implant, Ti6Al4V): 13-455820 - 1 шт;
 - 1.14 Имплантат одноэтапный KOC PLUS диаметр 5.0 мм, компрессионная часть 9 мм, полированная часть 3 мм, Ti6Al4V (KOC PLUS 5.0 9+3 Implant, Ti6Al4V): 13-455821 - 1 шт;
 - 1.15 Имплантат одноэтапный KOC PLUS диаметр 5.0 мм, компрессионная часть 11 мм, полированная часть 3 мм, Ti6Al4V (KOC PLUS 5.0 11+3 Implant, Ti6Al4V): 13-455822 - 1 шт;
 - 1.16 Имплантат одноэтапный KOC PLUS диаметр 5.0 мм, компрессионная часть 13 мм, полированная часть 3 мм, Ti6Al4V (KOC PLUS 5.0 13+3 Implant, Ti6Al4V): 13-455823 - 1 шт;
 - 1.17 Имплантат одноэтапный KOC PLUS диаметр 5.0 мм, компрессионная часть 16 мм, полированная часть 3 мм, Ti6Al4V (KOC PLUS 5.0 16+3 Implant, Ti6Al4V): 13-455824 - 1 шт.
2. Наклейки для пациента – 2 шт.
 3. Инструкция по применению – 1 шт.

VIII. Имплантаты одноэтапные KOC MU, в составе:

- 1.1 Имплантат одноэтапный КОС MU диаметр 3.0 мм, длина 15 мм, Ti6Al4V (КОС MU 3.0 15 Implant, Ti6Al4V): 13-455830 - 1 шт;
- 1.2 Имплантат одноэтапный КОС MU диаметр 3.7 мм, длина 15 мм, Ti6Al4V (КОС MU 3.7 15 Implant, Ti6Al4V): 13-455831 - 1 шт;
- 1.3 Имплантат одноэтапный КОС MU диаметр 4.1 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (КОС MU 4.1 10 Implant, Ti6Al4V): 13-455843 - 1 шт;
- 1.4 Имплантат одноэтапный КОС MU диаметр 4.1 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (КОС MU 4.1 12 Implant, Ti6Al4V): 13-455832 - 1 шт;
- 1.5 Имплантат одноэтапный КОС MU диаметр 4.1 мм, длина 15 мм, Ti6Al4V (КОС MU 4.1 15 Implant, Ti6Al4V): 13-455833 - 1 шт;
- 1.6 Имплантат одноэтапный КОС MU диаметр 5.0 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (КОС MU 5.0 10 Implant, Ti6Al4V): 13-455834 - 1 шт;
- 1.7 Имплантат одноэтапный КОС MU диаметр 5.0 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (КОС MU 5.0 12 Implant, Ti6Al4V): 13-455835 - 1 шт;
- 1.8 Имплантат одноэтапный КОС MU диаметр 3.2 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (КОС MU 3.2 12 Implant, Ti6Al4V): 13-455838 - 1 шт;
- 1.9 Имплантат одноэтапный КОС MU диаметр 3.2 мм, длина 15 мм, Ti6Al4V (КОС MU 3.2 15 Implant, Ti6Al4V): 13-455839 - 1 шт;
- 1.10 Имплантат одноэтапный КОС MU диаметр 3.7 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (КОС MU 3.7 10 Implant, Ti6Al4V): 13-455840 - 1 шт;
- 1.11 Имплантат одноэтапный КОС MU диаметр 3.7 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (КОС MU 3.7 12 Implant, Ti6Al4V): 13-455841 - 1 шт.
2. Наклейки для пациента – 2 шт.
3. Инструкция по применению – 1 шт.

IX. Имплантаты одноэтапные КОС Micro, в составе:

- 1.1 Имплантат одноэтапный КОС Micro диаметр 3.0 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (КОС Micro 3.0 10 Implant, Ti6Al4V): 13-455900 - 1 шт;
- 1.2 Имплантат одноэтапный КОС Micro диаметр 3.0 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (КОС Micro 3.0 12 Implant, Ti6Al4V): 13-455901 - 1 шт;
- 1.3 Имплантат одноэтапный КОС Micro диаметр 3.2 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (КОС Micro 3.2 12 Implant, Ti6Al4V): 13-455905 - 1 шт;
- 1.4 Имплантат одноэтапный КОС Micro диаметр 3.2 мм, длина 15 мм, Ti6Al4V (КОС Micro 3.2 15 Implant, Ti6Al4V): 13-455906 - 1 шт;
- 1.5 Имплантат одноэтапный КОС Micro диаметр 3.7 мм, длина 6 мм, Ti6Al4V (КОС Micro 3.7 6 Implant, Ti6Al4V): 13-455910 - 1 шт;
- 1.6 Имплантат одноэтапный КОС Micro диаметр 3.7 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (КОС Micro 3.7 8 Implant, Ti6Al4V): 13-455911 - 1 шт;
- 1.7 Имплантат одноэтапный КОС Micro диаметр 3.7 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (КОС Micro 3.7 10 Implant, Ti6Al4V): 13-455912 - 1 шт;
- 1.8 Имплантат одноэтапный КОС Micro диаметр 3.7 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (КОС Micro 3.7 12 Implant, Ti6Al4V): 13-455913 - 1 шт;
- 1.9 Имплантат одноэтапный КОС Micro диаметр 3.7 мм, длина 15 мм, Ti6Al4V (КОС Micro 3.7 15 Implant, Ti6Al4V): 13-455914 - 1 шт;
- 1.10 Имплантат одноэтапный КОС Micro диаметр 4.1 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (КОС Micro 4.1 8 Implant, Ti6Al4V): 13-455920 - 1 шт;
- 1.11 Имплантат одноэтапный КОС Micro диаметр 4.1 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (КОС Micro 4.1 10 Implant, Ti6Al4V): 13-455921 - 1 шт;
- 1.12 Имплантат одноэтапный КОС Micro диаметр 4.1 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (КОС Micro 4.1 12 Implant, Ti6Al4V): 13-455922 - 1 шт;

- 1.13 Имплантат одноэтапный КОС Micro диаметр 4.1 мм, длина 15 мм, Ti6Al4V (КОС Micro 4.1 15 Implant, Ti6Al4V): 13-455923 - 1 шт;
- 1.14 Имплантат одноэтапный КОС Micro диаметр 5 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (КОС Micro 5 10 Implant, Ti6Al4V): 13-455925 - 1 шт;
- 1.15 Имплантат одноэтапный КОС Micro диаметр 5 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (КОС Micro 5 12 Implant, Ti6Al4V): 13-455926 - 1 шт.

2. Наклейки для пациента – 2 шт.

3. Инструкция по применению – 1 шт.

Х. Имплантаты одноэтапные КОС Root, в составе:

- 1.1 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 3.0 мм, длина 6 мм, Ti6Al4V (КОС Root 3.0 6 Implant, Ti6Al4V): 13-458100 - 1 шт;
- 1.2 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 3.0 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (КОС Root 3.0 8 Implant, Ti6Al4V): 13-458101 - 1 шт;
- 1.3 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 3.0 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (КОС Root 3.0 10 Implant, Ti6Al4V): 13-458102 - 1 шт;
- 1.4 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 3.0 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (КОС Root 3.0 12 Implant, Ti6Al4V): 13-458103 - 1 шт;
- 1.5 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 3.0 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (КОС Root 3.0 14 Implant, Ti6Al4V): 13-458104 - 1 шт;
- 1.6 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 3.0 мм, длина 16 мм, Ti6Al4V (КОС Root 3.0 16 Implant, Ti6Al4V): 13-458105 - 1 шт;
- 1.7 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 3.0 мм, длина 18 мм, Ti6Al4V (КОС Root 3.0 18 Implant, Ti6Al4V): 13-458106 - 1 шт;
- 1.8 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 3.0 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (КОС Root 3.0 20 Implant, Ti6Al4V): 13-458107 - 1 шт;
- 1.9 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 3.5 мм, длина 6 мм, Ti6Al4V (КОС Root 3.5 6 Implant, Ti6Al4V): 13-458110 - 1 шт;
- 1.10 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 3.5 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (КОС Root 3.5 8 Implant, Ti6Al4V): 13-458111 - 1 шт;
- 1.11 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 3.5 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (КОС Root 3.5 10 Implant, Ti6Al4V): 13-458112 - 1 шт;
- 1.12 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 3.5 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (КОС Root 3.5 12 Implant, Ti6Al4V): 13-458113 - 1 шт;
- 1.13 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 3.5 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (КОС Root 3.5 14 Implant, Ti6Al4V): 13-458114 - 1 шт;
- 1.14 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 3.5 мм, длина 16 мм, Ti6Al4V (КОС Root 3.5 16 Implant, Ti6Al4V): 13-458115 - 1 шт;
- 1.15 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 3.5 мм, длина 18 мм, Ti6Al4V (КОС Root 3.5 18 Implant, Ti6Al4V): 13-458116 - 1 шт;
- 1.16 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 3.5 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (КОС Root 3.5 20 Implant, Ti6Al4V): 13-458117 - 1 шт;
- 1.17 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 4.0 мм, длина 6 мм, Ti6Al4V (КОС Root 4.0 6 Implant, Ti6Al4V): 13-458120 - 1 шт;
- 1.18 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 4.0 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (КОС Root 4.0 8 Implant, Ti6Al4V): 13-458121 - 1 шт;
- 1.19 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 4.0 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (КОС Root 4.0 10 Implant, Ti6Al4V): 13-458122 - 1 шт;
- 1.20 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 4.0 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (КОС Root 4.0 12 Implant, Ti6Al4V): 13-458123 - 1 шт;

- 1.21 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 4.0 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (КОС Root 4.0 14 Implant, Ti6Al4V): 13-458124 - 1 шт;
- 1.22 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 4.0 мм, длина 16 мм, Ti6Al4V (КОС Root 4.0 16 Implant, Ti6Al4V): 13-458125 - 1 шт;
- 1.23 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 4.0 мм, длина 18 мм, Ti6Al4V (КОС Root 4.0 18 Implant, Ti6Al4V): 13-458126 - 1 шт;
- 1.24 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 4.0 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (КОС Root 4.0 20 Implant, Ti6Al4V): 13-458127 - 1 шт;
- 1.25 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 4.5 мм, длина 6 мм, Ti6Al4V (КОС Root 4.5 6 Implant, Ti6Al4V): 13-458130 - 1 шт;
- 1.26 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 4.5 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (КОС Root 4.5 8 Implant, Ti6Al4V): 13-458131 - 1 шт;
- 1.27 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 4.5 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (КОС Root 4.5 10 Implant, Ti6Al4V): 13-458132 - 1 шт;
- 1.28 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 4.5 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (КОС Root 4.5 12 Implant, Ti6Al4V): 13-458133 - 1 шт;
- 1.29 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 4.5 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (КОС Root 4.5 14 Implant, Ti6Al4V): 13-458134 - 1 шт;
- 1.30 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 4.5 мм, длина 16 мм, Ti6Al4V (КОС Root 4.5 16 Implant, Ti6Al4V): 13-458135 - 1 шт;
- 1.31 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 4.5 мм, длина 18 мм, Ti6Al4V (КОС Root 4.5 18 Implant, Ti6Al4V): 13-458136 - 1 шт;
- 1.32 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 4.5 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (КОС Root 4.5 20 Implant, Ti6Al4V): 13-458137 - 1 шт;
- 1.33 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 5.0 мм, длина 6 мм, Ti6Al4V (КОС Root 5.0 6 Implant, Ti6Al4V): 13-458140 - 1 шт;
- 1.34 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 5.0 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (КОС Root 5.0 8 Implant, Ti6Al4V): 13-458141 - 1 шт;
- 1.35 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 5.0 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (КОС Root 5.0 10 Implant, Ti6Al4V): 13-458142 - 1 шт;
- 1.36 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 5.0 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (КОС Root 5.0 12 Implant, Ti6Al4V): 13-458143 - 1 шт;
- 1.37 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 5.0 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (КОС Root 5.0 14 Implant, Ti6Al4V): 13-458144 - 1 шт;
- 1.38 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 5.5 мм, длина 6 мм, Ti6Al4V (КОС Root 5.5 6 Implant, Ti6Al4V): 13-458150 - 1 шт;
- 1.39 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 5.5 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (КОС Root 5.5 8 Implant, Ti6Al4V): 13-458151 - 1 шт;
- 1.40 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 5.5 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (КОС Root 5.5 10 Implant, Ti6Al4V): 13-458152 - 1 шт;
- 1.41 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 5.5 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (КОС Root 5.5 12 Implant, Ti6Al4V): 13-458153 - 1 шт;
- 1.42 Имплантат одноэтапный КОС Root диаметр 5.5 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (КОС Root 5.5 14 Implant, Ti6Al4V): 13-458154 - 1 шт.

2. Наклейки для пациента – 2 шт.

3. Инструкция по применению – 1 шт.

XI. Имплантаты одноэтапные Strategic Implant, в составе:

- 1.1 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 2.7 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 2.7 10, Ti6Al4V): 14-900200 - 1 шт;
- 1.2 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 2.7 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 2.7 12, Ti6Al4V): 14-900201 - 1 шт;
- 1.3 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 2.7 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 2.7 14, Ti6Al4V): 14-900202 - 1 шт;
- 1.4 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 2.7 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 2.7 17, Ti6Al4V): 14-900203 - 1 шт;
- 1.5 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 2.7 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 2.7 20, Ti6Al4V): 14-900204 - 1 шт;
- 1.6 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 2.7 мм, длина 23 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 2.7 23, Ti6Al4V): 14-900205 - 1 шт;
- 1.7 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 2.7 мм, длина 26 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 2.7 26, Ti6Al4V): 14-900206 - 1 шт;
- 1.8 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 2.7 мм, длина 29 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 2.7 29, Ti6Al4V): 14-900207 - 1 шт;
- 1.9 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 2.7 мм, длина 32 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 2.7 32, Ti6Al4V): 14-900209 - 1 шт;
- 1.10 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.5 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 3.5 10, Ti6Al4V): 14-900208 - 1 шт;
- 1.11 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.5 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 3.5 14, Ti6Al4V): 14-900210 - 1 шт;
- 1.12 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.5 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 3.5 17, Ti6Al4V): 14-900211 - 1 шт;
- 1.13 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.5 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 3.5 20, Ti6Al4V): 14-900212 - 1 шт;
- 1.14 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.5 мм, длина 23 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 3.5 23, Ti6Al4V): 14-900213 - 1 шт;
- 1.15 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.5 мм, длина 26 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 3.5 26, Ti6Al4V): 14-900214 - 1 шт;
- 1.16 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.5 мм, длина 29 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 3.5 29, Ti6Al4V): 14-900215 - 1 шт;
- 1.17 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.5 мм, длина 32 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 3.5 32, Ti6Al4V): 14-900216 - 1 шт;
- 1.18 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.5 мм, длина 35 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 3.5 35, Ti6Al4V): 14-900217 - 1 шт;
- 1.19 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.5 мм, длина 38 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 3.5 38, Ti6Al4V): 14-900218 - 1 шт;
- 1.20 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 4.5 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 4.5 14, Ti6Al4V): 14-900220 - 1 шт;
- 1.21 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 4.5 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 4.5 17, Ti6Al4V): 14-900221 - 1 шт;
- 1.22 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 4.5 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 4.5 20, Ti6Al4V): 14-900222 - 1 шт;
- 1.23 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 4.5 мм, длина 23 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 4.5 23, Ti6Al4V): 14-900223 - 1 шт;
- 1.24 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 4.5 мм, длина 26 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 4.5 26, Ti6Al4V): 14-900224 - 1 шт;
- 1.25 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 4.5 мм, длина 29 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 4.5 29, Ti6Al4V): 14-900225 - 1 шт;
- 1.26 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.5 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 3.5 12, Ti6Al4V): 14-900226 - 1 шт;

- 1.27 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 5.5 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 5.5 12, Ti6Al4V): 14-900250 - 1 шт;
- 1.28 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 5.5 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 5.5 14, Ti6Al4V): 14-900251 - 1 шт;
- 1.29 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 5.5 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 5.5 17, Ti6Al4V): 14-900252 - 1 шт;
- 1.30 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 5.5 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 5.5 20, Ti6Al4V): 14-900253 - 1 шт;
- 1.31 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 5.5 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 5.5 8, Ti6Al4V): 14-900255 - 1 шт;
- 1.32 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 7 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 7 8, Ti6Al4V): 14-900258 - 1 шт;
- 1.33 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 7 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 7 12, Ti6Al4V): 14-900260 - 1 шт;
- 1.34 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 7 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 7 14, Ti6Al4V): 14-900261 - 1 шт;
- 1.35 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 7 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 7 17, Ti6Al4V): 14-900262 - 1 шт;
- 1.36 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 7 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 7 20, Ti6Al4V): 14-900263 - 1 шт;
- 1.37 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 5.5 мм, длина 23 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 5.5 23, Ti6Al4V): 14-900265 - 1 шт;
- 1.38 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 5.5 мм, длина 26 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 5.5 26, Ti6Al4V): 14-900266 - 1 шт;
- 1.39 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 5.5 мм, длина 29 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 5.5 29, Ti6Al4V): 14-900267 - 1 шт;
- 1.40 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 9 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 9 8, Ti6Al4V): 14-900269 - 1 шт;
- 1.41 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 9 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 9 10, Ti6Al4V): 14-900270 - 1 шт;
- 1.42 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 9 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 9 14, Ti6Al4V): 14-900271 - 1 шт;
- 1.43 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 12 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 12 10, Ti6Al4V): 14-900272 - 1 шт;
- 1.44 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 12 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 12 14, Ti6Al4V): 14-900273 - 1 шт;
- 1.45 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 9 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 9 12, Ti6Al4V): 14-900274 - 1 шт;
- 1.46 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 12 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 12 12, Ti6Al4V): 14-900275 - 1 шт;
- 1.47 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 10.5 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 10.5 10, Ti6Al4V): 14-900276 - 1 шт;
- 1.48 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 10.5 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 10.5 12, Ti6Al4V): 14-900277 - 1 шт;
- 1.49 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 10.5 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 10.5 14, Ti6Al4V): 14-900278 - 1 шт;
- 1.50 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 12 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 12 8, Ti6Al4V): 14-900279 - 1 шт;
- 1.51 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 10.5 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 10.5 17, Ti6Al4V): 14-900280 - 1 шт;
- 1.52 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 5.5 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 5.5 10, Ti6Al4V): 14-900281 - 1 шт;

- 1.53 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 7 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 7 10, Ti6Al4V): 14-900282 - 1 шт;
- 1.54 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.6 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 3.6 12, Ti6Al4V): 14-900284 - 1 шт;
- 1.55 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.6 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 3.6 10, Ti6Al4V): 14-900285 - 1 шт;
- 1.56 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.6 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 3.6 14, Ti6Al4V): 14-900286 - 1 шт;
- 1.57 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.6 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 3.6 17, Ti6Al4V): 14-900287 - 1 шт;
- 1.58 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.6 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 3.6 20, Ti6Al4V): 14-900288 - 1 шт;
- 1.59 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.6 мм, длина 23 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 3.6 23, Ti6Al4V): 14-900289 - 1 шт;
- 1.60 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.6 мм, длина 26 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 3.6 26, Ti6Al4V): 14-900290 - 1 шт;
- 1.61 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.6 мм, длина 29 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 3.6 29, Ti6Al4V): 14-900291 - 1 шт;
- 1.62 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 4.6 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 4.6 10, Ti6Al4V): 14-900292 - 1 шт;
- 1.63 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 4.6 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 4.6 14, Ti6Al4V): 14-900293 - 1 шт;
- 1.64 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 4.6 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 4.6 17, Ti6Al4V): 14-900294 - 1 шт;
- 1.65 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 4.6 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 4.6 20, Ti6Al4V): 14-900295 - 1 шт;
- 1.66 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 4.6 мм, длина 23 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 4.6 23, Ti6Al4V): 14-900296 - 1 шт;
- 1.67 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 4.6 мм, длина 26 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 4.6 26, Ti6Al4V): 14-900297 - 1 шт;
- 1.68 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 4.6 мм, длина 29 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 4.6 29, Ti6Al4V): 14-900298 - 1 шт;
- 1.69 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 4.6 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 4.6 8, Ti6Al4V): 14-900299 - 1 шт;
- 1.70 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 4.6 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant 4.6 12, Ti6Al4V): 14-900300 - 1 шт;
- 1.71 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.6 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant MU 3.6 14, Ti6Al4V): 14-900330 - 1 шт;
- 1.72 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.6 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant MU 3.6 17, Ti6Al4V): 14-900331 - 1 шт;
- 1.73 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.6 мм, длина 20 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant MU 3.6 20, Ti6Al4V): 14-900332 - 1 шт;
- 1.74 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.6 мм, длина 23 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant MU 3.6 23, Ti6Al4V): 14-900333 - 1 шт;
- 1.75 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 5.5 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant MU 5.5 10, Ti6Al4V): 14-900334 - 1 шт;
- 1.76 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 5.5 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant MU 5.5 12, Ti6Al4V): 14-900335 - 1 шт;
- 1.77 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 5.5 мм, длина 14 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant MU 5.5 14, Ti6Al4V): 14-900336 - 1 шт;
- 1.78 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 7.0 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant MU 7.0 10, Ti6Al4V): 14-900337 - 1 шт;

- 1.79 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 7.0 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant MU 7.0 12, Ti6Al4V): 14-900338 - 1 шт;
- 1.80 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.6 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant MU 3.6 12, Ti6Al4V): 14-900376 - 1 шт;
- 1.81 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.6 мм, длина 26 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant MU 3.6 26, Ti6Al4V): 14-900377 - 1 шт;
- 1.82 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.6 мм, длина 29 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant MU 3.6 29, Ti6Al4V): 14-900378 - 1 шт;
- 1.83 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.6 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant MU 3.6 8, Ti6Al4V): 14-900397 - 1 шт;
- 1.84 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 3.6 мм, длина 10 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant MU 3.6 10, Ti6Al4V): 14-900398 - 1 шт;
- 1.85 Имплантат одноэтапный Strategic Implant диаметр 4.6 мм, длина 8 мм, Ti6Al4V (Strategic Implant MU 4.6 8, Ti6Al4V): 14-900379 - 1 шт.

2. Инструкция по применению – 1 шт.

XII. Имплантаты одноэтапные TPG Uno, в составе:

- 1.1 Имплантат одноэтапный TPG Uno диаметр 3.5 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (TPG Uno 3.5+ 12 Implant, Ti6Al4V): 13-420120 - 1 шт;
- 1.2 Имплантат одноэтапный TPG Uno диаметр 3.5 мм, длина 15 мм, Ti6Al4V (TPG Uno 3.5+ 15 Implant, Ti6Al4V): 13-420121 - 1 шт;
- 1.3 Имплантат TPG одноэтапный диаметр 3.5 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (TPG Uno 3.5+ 17 Implant, Ti6Al4V): 13-420122 - 1 шт;
- 1.4 Имплантат TPG одноэтапный диаметр 3.5 мм, длина 19 мм, Ti6Al4V (TPG Uno 3.5+ 19 Implant, Ti6Al4V): 13-420123 - 1 шт;
- 1.5 Имплантат TPG одноэтапный диаметр 3.5 мм, длина 21 мм, Ti6Al4V (TPG Uno 3.5+ 21 Implant, Ti6Al4V): 13-420124 - 1 шт;
- 1.6 Имплантат TPG одноэтапный диаметр 3.5 мм, длина 23 мм, Ti6Al4V (TPG Uno 3.5+ 23 Implant, Ti6Al4V): 13-420125 - 1 шт;
- 1.7 Имплантат TPG одноэтапный диаметр 3.5 мм, длина 26 мм, Ti6Al4V (TPG Uno 3.5+ 26 Implant, Ti6Al4V): 13-420126 - 1 шт;
- 1.8 Имплантат TPG одноэтапный диаметр 3.5 мм, длина 29 мм, Ti6Al4V (TPG Uno 3.5+ 29 Implant, Ti6Al4V): 13-420127 - 1 шт;
- 1.9 Имплантат TPG одноэтапный диаметр 4.1 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (TPG Uno 4.1 12 Implant, Ti6Al4V): 13-420130 - 1 шт;
- 1.10 Имплантат TPG одноэтапный диаметр 4.1 мм, длина 15 мм, Ti6Al4V (TPG Uno 4.1 15 Implant, Ti6Al4V): 13-420131 - 1 шт;
- 1.11 Имплантат TPG одноэтапный диаметр 4.1 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (TPG Uno 4.1 17 Implant, Ti6Al4V): 13-420132 - 1 шт;
- 1.12 Имплантат TPG одноэтапный диаметр 4.1 мм, длина 19 мм, Ti6Al4V (TPG Uno 4.1 19 Implant, Ti6Al4V): 13-420133 - 1 шт;
- 1.13 Имплантат TPG одноэтапный диаметр 4.1 мм, длина 21 мм, Ti6Al4V (TPG Uno 4.1 21 Implant, Ti6Al4V): 13-420134 - 1 шт;
- 1.14 Имплантат TPG одноэтапный диаметр 4.1 мм, длина 23 мм, Ti6Al4V (TPG Uno 4.1 23 Implant, Ti6Al4V): 13-420135 - 1 шт;
- 1.15 Имплантат одноэтапный TPG Uno диаметр 3.5 мм, длина 12 мм, Ti6Al4V (TPG Uno 3.5 12 SH Implant, Ti6Al4V): 13-420170 - 1 шт;
- 1.16 Имплантат одноэтапный TPG Uno диаметр 3.5 мм, длина 15 мм, Ti6Al4V (TPG Uno 3.5 15 SH Implant, Ti6Al4V): 13-420171 - 1 шт;
- 1.17 Имплантат TPG одноэтапный диаметр 3.5 мм, длина 17 мм, Ti6Al4V (TPG Uno 3.5 17 SH Implant, Ti6Al4V): 13-420172 - 1 шт;

- 1.18 Имплантат TPG одноэтапный диаметр 3.5 мм, длина 19 мм, Ti6Al4V (TPG Uno 3.5 19 SH Implant, Ti6Al4V): 13-420173 - 1 шт;
- 1.19 Имплантат TPG одноэтапный диаметр 3.5 мм, длина 21 мм, Ti6Al4V (TPG Uno 3.5 21 SH Implant, Ti6Al4V): 13-420174 - 1 шт;
- 1.20 Имплантат TPG одноэтапный диаметр 3.5 мм, длина 23 мм, Ti6Al4V (TPG Uno 3.5 23 SH Implant, Ti6Al4V): 13-420175 - 1 шт;
- 1.21 Имплантат TPG одноэтапный диаметр 3.5 мм, длина 26 мм, Ti6Al4V (TPG Uno 3.5 26 SH Implant, Ti6Al4V): 13-420176 - 1 шт;
- 1.22 Имплантат TPG одноэтапный диаметр 3.5 мм, длина 29 мм, Ti6Al4V (TPG Uno 3.5 29 SH Implant, Ti6Al4V): 13-420177 - 1 шт.
2. Инструкция по применению – 1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ (ИЗГОТОВИТЕЛЕ)

Simpladent GmbH
Dorfplatz 11, CH-8737 Gommiswald, Switzerland

(Симпладент ГмбХ
Дорфплац 11, 8737 Гоммисвальд, Швейцария)

Место производства: Simpladent GmbH (Симпладент ГмбХ) Dorfplatz 11, CH-8737 Gommiswald, Switzerland

Телефон: +41 (0)55 293 23 23

E-mail: info@simpladent.ch

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ИЗГОТОВИТЕЛЯ) НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Общество с ограниченной ответственностью «ИМПЛАНТ КОМПАНИ» (ООО "ИМПЛАНТ КОМПАНИ")

Адрес: 107392, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ХРОМОВА, ДОМ 3, ОФИС 301

Телефон: +79684284800

E-mail: Gleb.b@implantcompany.ru

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектация указана в разделе “НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ”

Инструкция по применению предоставляется для ознакомления потребителю на бумажном носителе при каждом заказе и в форме электронного документа посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на интернет-странице <https://simpladent-implants.com>, ссылка указывается на маркировке.

НАЗНАЧЕНИЕ

для хирургической имплантации в альвеолярную и/или базальную кость нижней или верхней челюсти для установки и фиксации дентального протеза

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стоматологическая хирургия, хирургия.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Изделия предназначены для использования квалифицированным медицинским персоналом.

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

- Директива 93/42/ЕЕС от 14 июня 1993 г. о медицинских изделиях с поправками, внесенными Директивой 2007/47/ЕС от 5 сентября 2007 г.
- EN 1041 - Информация, предоставляемая производителем с медицинскими изделиями.
- EN ISO 14971 - Медицинские изделия. Применение управления рисками к медицинским изделиям.
- EN ISO 13485 - Системы управления качеством. Требования для целей регулирования.
- EN ISO 10993-1 - Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 1. Оценка и испытание в процессе управления рисками.
- EN ISO 10993-5 - Биологическая оценка медицинских изделий. Часть 5. Испытания на цитотоксичность в лабораторных условиях.
- IEC 62366-1 - Медицинские изделия. Применение проектирования эксплуатационной пригодности к медицинским изделиям.
- EN ISO 11137-1 - Стерилизация медицинской продукции. Радиация. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий.
- EN ISO 11137-2 - Стерилизация медицинской продукции. Облучение. Часть 2. Определение стерилизующей дозы.
- ISO 2859-1 - Процедуры отбора образцов для проверки по свойствам. Часть 1. Схемы отбора образцов, индексированных по приемлемому уровню качества (AQL) для проверки по партиям (ISO 2859-1:1999/Amd.1: 2011).
- EN ISO 11737-1/AC - Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 1. Определение популяции микроорганизмов на продукции.
- EN ISO 11737-2 - Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 2. Испытания на стерильность, проводимые при определении, валидации и проведении процесса стерилизации.
- ISO 14801 - Стоматология. Имплантаты. Тест на динамическую усталость для внутрикостных зубных имплантатов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Невозможность дальнейшего сохранения разрушенного зуба и необходимость его удаления;
2. Полная или частичная адентия;
3. Травмирование зуба с проникновением в поддесневую часть;
4. Необходимость немедленного восстановления зуба после удаления.
5. Улучшение качества жизни пациента, требующего частичного или полного удаления зубов, необходимого для установки имплантатов.

Целевая группа пациентов

Люди с частичным или полным отсутствием зубов с полностью развитыми челюстными костями или заболеваниями верхнечелюстного синуса.

Люди с сильной травмой зуба с глубоким проникновением под десенную ткань.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Абсолютные противопоказания

1. Пациенты, системное состояние которых не позволяет проведение имплантации.
2. Перед, во время или после лучевой терапии и/или злокачественных заболеваний.
3. Декомпенсированный сахарный диабет или другие декомпенсированные системные заболевания.
4. Аллергия на материалы, входящие в состав изделий.

Относительные противопоказания

1. Диабет, бруксизм, беременность. Наркотическая и алкогольная зависимость.
2. Кость, прошедшая облучение, терапия с использованием антикоагулянтов. Незначительное количество кости: особенно в вертикальном измерении и/или в непосредственной близости от структур, требующих дополнительной защиты (нерв, верхнечелюстная пазуха, нужно проверить, нельзя ли, например, с меньшим риском использовать латеральные имплантаты.
3. Общие хирургические основания для отказа от любого вмешательства: все декомпенсированные заболевания сердечно-сосудистой системы; все злокачественные новообразования в полости рта; радиотерапия; химиотерапия в настоящее время или в прошлом (особенно направленная на кость, например, при бисфосфонатах); длительная терапия препаратами, которые влияют на физиологию костей или снижают сопротивляемость пациента инфекциям.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. После имплантации письменно зафиксировать в карточке пациента вид использованного имплантата и номер партии;
2. Имплантаты могут использоваться только в период своего срока годности;
3. Вскрывать упаковку непосредственно перед введением имплантата;
4. Перед установкой имплантата следует избегать любого его соприкосновения с инородными веществами;
5. Не касаться рукой эндооссальной части имплантата;
6. В случае случайного проглатывания имплантатов установить местонахождение предмета и принять необходимые медицинские меры;
7. Регулярно контролировать заживление имплантата;
8. Во избежание нанесения вреда костной ткани, своевременно удалить неостеоинтегрированные либо инфицированные имплантаты. Время, когда стоит прибегнуть к данной процедуре, определяет стоматолог;
9. При лечении пациентов с выявленным парадонтитом следует прибегнуть к имплантатам с гладкой поверхностью, а также следует рассмотреть необходимость сопровождающего лечения с использованием антибиотиков;
10. Не подвергать изделия повторной обработке (очистке, стерилизации);
11. Не использовать при повреждении упаковки;
12. Перед применением обратиться к инструкции по применению.
13. Не допускать контакта медицинского изделия с посторонними веществами до и во время установки имплантата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Использование нестерильного изделия может привести к серьезной инфекции у пациента или обострению существующей инфекции.
2. В случае повторной обработки (очистки, повторной стерилизации) изделий могут возникнуть инфекции.
3. В случае отсутствия остеоинтеграции или инфекции имплантат должен быть удален.
4. Не использовать изделие в случае известной или предполагаемой индивидуальной повышенной чувствительности к материалу изделия.
5. Предупреждение о возможности взаимодействия титановых поверхностей с продуктами для ухода за полостью рта, содержащими фтор.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

1. Боли, припухлости, речевые трудности и воспаление десны;
2. Возникновение горизонтальных и вертикальных костных разрушений;
3. Отторжение имплантата;
4. Реакции местной непереносимости/явления раздражения, воспалительная реакция, кровотечение, реакции непереносимости, острой или системной токсичности.

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Изделия поставляются стерильным и предназначены для однократного применения.

Процесс стерилизации проводится с применением радиации.

Процесс стерилизации соответствует международным стандартам. Результаты процедур валидации и тестирования подтверждают соответствие медицинского изделия требованиям Директивы MDD 93/42/ЕЕС.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ, МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Все имплантаты являются стерильными изделиями. Метод стерилизации – гамма-стерилизация.

Изделия поставляются в стерильной упаковке. Стерильная упаковка гарантирует, что имплантат доставляется к хирургическому полю в исходном состоянии.

Предусмотренная стерилизационная доза составляет минимум 25 кГр; допустимая максимальная доза составляет 38 кГр.

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики имплантатов одноэтапных Simpladent представлены в таблицах ниже.

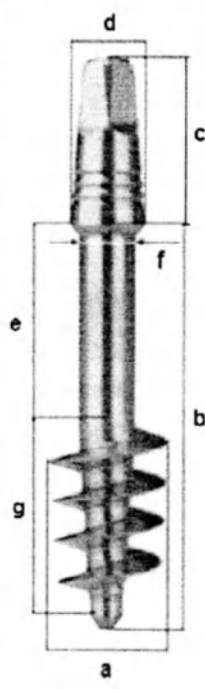
Имплантаты Simpladent являются однокомпонентными имплантатами и разработаны для одноэтапного метода имплантации.

I. Имплантаты одноэтапные BECES

Имплантаты BECES подходят для фиксации зубных протезов в 1-й, 2-й и, при необходимости, 3-й кортикальной кости. Могут использоваться в зубной лунке при показании сразу же после экстракции и во многих случаях устанавливаться сразу. Поверхность имплантатов механически сглажена на всех участках. Имплантат с самонарезающей резьбой и защитой от внутрикостной ротации изготовлен из высокопрочного титанового сплава. Условно подходит для индивидуальных зубных протезов.

Применяемое усилие закручивания – не более 80 Н*см.

Шероховатость поверхности – не более 1,0 мкм.

№	Артикул	Диаметр, мм (a)	Длина (внутрикостная), мм (b)	Длина гладкой части, мм (e)	Максимальный диаметр гладкой части, мм (f)	Длина резьбы (g)/шаг резьбы, мм	Масса, г ±0,1	Общий вид
Имплантаты одноэтапные BECES								
1.	13-900190	2,7±0,05	10±0,1	2,55±0,05	1,4 ± 0,1	4,5±0,05/1,5±0,05	0,5	 c=6,8±0,1 мм d=3,35±0,05 мм
2.	13-900191	2,7±0,05	12±0,1	2,95±0,05	1,4 ± 0,1	4,5±0,05/1,5±0,05	0,5	
3.	13-900192	2,7±0,05	14±0,1	2,95±0,05	1,4 ± 0,1	4,5±0,05/1,5±0,05	0,5	
4.	13-900193	2,7±0,05	17±0,1	2,95±0,05	1,4 ± 0,1	4,5±0,05/1,5±0,05	0,7	
5.	13-900194	2,7±0,05	20±0,1	2,95±0,05	1,4 ± 0,1	4,5±0,05/1,5±0,05	0,7	
6.	13-900195	2,7±0,05	23±0,1	1,7±0,01	1,4 ± 0,1	5,5±0,05/1,5±0,05	0,7	
7.	13-900196	2,7±0,05	26±0,1	19,2±0,1	1,4 ± 0,1	5,5±0,05/1,5±0,05	0,8	
8.	13-900197	2,7±0,05	29±0,1	22,2±0,1	1,4 ± 0,1	5,5±0,05/1,5±0,05	0,8	
9.	13-900198	2,7±0,05	32±0,1	25,2±0,1	1,4 ± 0,1	3,5±0,05/1,5±0,05	0,8	
10.	13-900480	3±0,05	10±0,1	4,2±0,05	1,7 ± 0,1	4,5±0,05/1,5±0,05	0,5	
11.	13-900481	3±0,05	12±0,1	6,2±0,05	1,7 ± 0,1	4,5±0,05/1,5±0,05	0,5	
12.	13-900482	3±0,05	14±0,1	7,2±0,1	1,7 ± 0,1	5,5±0,05/1,5±0,05	0,5	
13.	13-900483	3±0,05	17±0,1	10,2±0,1	1,7 ± 0,1	5,5±0,05/1,5±0,05	0,7	
14.	13-900484	3±0,05	20±0,1	13,2±0,1	1,7 ± 0,1	5,5±0,05/1,5±0,05	0,7	
15.	13-900485	3±0,05	23±0,1	16,2±0,1	1,7 ± 0,1	5,5±0,05/1,5±0,05	0,7	
16.	13-900486	3±0,05	26±0,1	19,2±0,1	1,7 ± 0,1	5,5±0,05/1,5±0,05	0,8	
17.	13-900487	3±0,05	29±0,1	22,2±0,1	1,7 ± 0,1	5,5±0,05/1,5±0,05	0,8	
18.	13-900488	3±0,05	32±0,1	25,2±0,1	1,7 ± 0,1	5,5±0,05/1,5±0,05	0,8	
19.	13-900208	3,5±0,05	10±0,1	3±0,05	2±0,05	5,5±0,05/1,5±0,05	0,35	
20.	13-900226	3,5±0,05	12±0,1	5±0,05	2±0,05	5,5±0,05/1,5±0,05	0,35	
21.	13-900210	3,5±0,05	14±0,1	5±0,05	2±0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,5	
22.	13-900211	3,5±0,05	17±0,1	8±0,1	2±0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,5	
23.	13-900212	3,5±0,05	20±0,1	11±0,1	2±0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,7	
24.	13-900213	3,5±0,05	23±0,1	14±0,1	2± 0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,7	
25.	13-900214	3,5±0,05	26±0,1	17± 0,1	2± 0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,8	
26.	13-900215	3,5±0,05	29±0,1	20± 0,1	2± 0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,8	
27.	13-900216	3,5±0,05	32±0,1	23± 0,1	2± 0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,8	
28.	13-900217	3,5±0,05	35±0,1	20± 0,1	2± 0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,8	

№	Артикул	Диаметр, мм (a)	Длина (внутрикостная), мм (b)	Длина гладкой части, мм (e)	Максимальный диаметр гладкой части, мм (f)	Длина резьбы (g)/ шаг резьбы, мм	Масса, г ±0,1	Общий вид
29.	13-900218	3,5±0,05	38±0,1	29± 0,1	2± 0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,8	
30.	13-900220	4,5±0,05	14±0,1	5±0,05	2,3±0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,5	
31.	13-900221	4,5±0,05	17±0,1	8±0,1	2,3±0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,7	
32.	13-900222	4,5±0,05	20±0,1	11±0,1	2,3±0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,7	
33.	13-900223	4,5±0,05	23±0,1	14±0,1	2,3±0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,7	
34.	13-900224	4,5±0,05	26±0,1	17±0,1	2,3±0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,8	
35.	13-900225	4,5±0,05	29±0,1	20±0,1	2,3±0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,8	
36.	13-900250	5,5±0,05	12±0,1	4,5±0,05	2,3±0,05	6,0±0,05/1,73±0,05	0,5	
37.	13-900251	5,5±0,05	14±0,1	6,5±0,01	2,3±0,05	6,0±0,05/1,73±0,05	0,5	
38.	13-900252	5,5±0,05	17±0,1	9,5±0,1	2,3±0,05	6,0±0,05/1,73±0,05	0,7	
39.	13-900253	5,5±0,05	20±0,1	12,5±0,1	2,3±0,05	6,0±0,05/1,73±0,05	0,7	
40.	13-900255	5,5±0,05	8±0,1	3±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/1,73±0,05	0,5	
41.	13-900258	7±0,1	8±0,1	3±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/2,06±0,05	0,5	
42.	13-900260	7±0,1	12±0,1	5±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/2,06±0,05	0,5	
43.	13-900261	7±0,1	14±0,1	7±0,1	2,3±0,05	5,5±0,05/2,06±0,05	0,5	
44.	13-900262	7±0,1	17±0,1	10±0,1	2,3±0,05	5,5±0,05/2,06±0,05	0,7	
45.	13-900263	7±0,1	20±0,1	13±0,1	2,3±0,05	5,5±0,05/2,06±0,05	0,7	
46.	13-900265	5,5±0,05	23±0,1	15,5±0,1	2,3±0,05	6,0±0,05/1,73±0,05	0,7	
47.	13-900266	5,5±0,05	26±0,1	18,5±0,1	2,3±0,05	6,0±0,05/1,73±0,05	0,8	
48.	13-900267	5,5±0,05	29±0,1	21,5±0,05	2,3±0,05	6,0±0,05/1,73±0,05	0,8	
49.	13-900269	9±0,1	8±0,1	2,4±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/2,9±0,05	0,5	
50.	13-900270	9±0,1	10±0,1	2,8±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/2,9±0,05	0,5	
51.	13-900271	9±0,1	14±0,1	6,8±0,1	2,3±0,05	5,5±0,05/2,9±0,05	0,5	
52.	13-900272	12±0,1	10±0,1	2,7±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/3,4±0,05	0,5	
53.	13-900273	12±0,1	14±0,1	6±0,05	2,3±0,05	6,5±0,1/3,4±0,05	0,5	
54.	13-900274	9±0,1	12±0,1	4,8±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/2,9±0,05	0,5	
55.	13-900275	12±0,1	12±0,1	4±0,05	2,3±0,05	6,5±0,1/3,4±0,05	0,5	
56.	13-900276	10,5±0,1	10±0,1	2,8±0,05	2,4±0,05	6,5±0,1/3,3±0,05	0,5	
57.	13-900277	10,5±0,1	12±0,1	4±0,05	2,4±0,05	6,5±0,1/3,3±0,05	0,5	

№	Артикул	Диаметр, мм (a)	Длина (внутрикостная), мм (b)	Длина гладкой части, мм (e)	Максимальный диаметр гладкой части, мм (f)	Длина резьбы (g)/ шаг резьбы, мм	Масса, г ±0,1	Общий вид
58.	13-900278	10,5±0,1	14±0,1	6±0,1	2,4±0,05	6,5±0,1/3,3±0,05	0,5	
59.	13-900279	12±0,1	8±0,1	2,5±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/3,4±0,05	0,5	
60.	13-900280	10,5±0,1	17±0,1	9±0,1	2,4±0,05	6,5±0,1/3,3±0,05	0,7	
61.	13-900281	5,5±0,05	10±0,1	4,5±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/1,73±0,05	0,5	
62.	13-900282	7±0,1	10±0,1	4,5±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/2,06±0,05	0,5	
63.	13-900284	3,6±0,05	12±0,1	6±0,05	2±0,05	5±0,05/1,54±0,05	0,5	
64.	13-900285	3,6±0,05	10±0,1	4±0,05	2±0,05	5±0,05/1,54±0,05	0,5	
65.	13-900286	3,6±0,05	14±0,1	5±0,05	2±0,05	7,5±0,1/1,54±0,05	0,5	
66.	13-900287	3,6±0,05	17±0,1	8±0,1	2±0,05	7,5±0,1/1,54±0,05	0,7	
67.	13-900288	3,6±0,05	20±0,1	11±0,1	2±0,05	7,5±0,1/1,54±0,05	0,7	
68.	13-900289	3,6±0,05	23±0,1	14±0,1	2±0,05	7,5±0,1/1,54±0,05	0,7	
69.	13-900290	3,6±0,05	26±0,1	17±0,1	2±0,05	7,5±0,1/1,54±0,05	0,8	
70.	13-900291	3,6±0,05	29±0,1	20±0,1	2±0,05	7,5±0,1/1,54±0,05	0,8	
71.	13-900292	4,6±0,05	10±0,1	4±0,05	2,2±0,05	5,5±0,05/1,77±0,05	0,5	
72.	13-900293	4,6±0,05	14±0,1	5±0,05	2,2±0,05	7,5±0,1/1,77±0,05	0,5	
73.	13-900294	4,6±0,05	17±0,1	8±0,1	2,2±0,05	7,5±0,1/1,77±0,05	0,7	
74.	13-900295	4,6±0,05	20±0,1	11±0,1	2,2±0,05	7,5±0,1/1,77±0,05	0,7	
75.	13-900296	4,6±0,05	23±0,1	14±0,1	2,2±0,05	7,5±0,1/1,77±0,05	0,7	
76.	13-900297	4,6±0,05	26±0,1	17±0,1	2,2±0,05	7,5±0,1/1,77±0,05	0,8	
77.	13-900298	4,6±0,05	29±0,1	20±0,1	2,2±0,05	7,5±0,1/1,77±0,05	0,8	
78.	13-900299	4,6±0,05	8±0,1	3±0,05	2,2±0,05	5,5±0,05/1,77±0,05	0,5	
79.	13-900300	4,6±0,05	12±0,1	6±0,05	2,2±0,05	5,5±0,05/1,77±0,05	0,5	
80.	13-900450	3,6±0,05	32±0,1	23± 0,1	2± 0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,8	
81.	13-900451	3,6±0,05	35±0,1	20± 0,1	2± 0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,8	
82.	13-900452	4,6±0,05	32±0,1	23± 0,1	2± 0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,8	
83.	13-900453	4,6±0,05	35±0,1	20± 0,1	2± 0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,8	

II. Имплантаты одноэтапные BECES MU

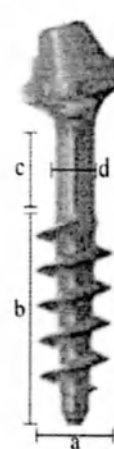
Имплантаты BECES MU имеют предварительный угол наклона 15° , а также могут быть дополнительно согнуты с помощью инструмента для вставки. В сочетании с клинически возможными ротационными положениями головки могут быть реализованы практически все углы наклона. Имплантаты BECES MU подходят для мостовидных протезов с окклюзионной винтовой фиксацией и могут эксплуатироваться только пользователями, прошедшими специальную профессиональную подготовку. Имплантаты изготовлены из высокопрочного титанового сплава.

Применяемое усилие закручивания – не более 45 Н*см.

Шероховатость поверхности – не более 1,0 мкм.

Диаметр абатмента-мультиюнита – $5,05 \pm 0,05$ мм

Высота абатмента-мультиюнита – $3,65 \pm 0,05$ мм.

Имплантаты одноэтапные BECES MU								
№	Артикул	Диаметр, мм (a)	Длина (внутрикостная), мм (b)	Максимальный диаметр гладкой части, мм (d)	Длина шейки, мм (c)	Шаг резьбы, мм	Общий вид	Масса, г $\pm 0,1$
1.	13-900330	$3,6 \pm 0,05$	$14 \pm 0,1$	$2,0 \pm 0,05$	$6 \pm 0,05$	$1,54 \pm 0,05$	 угол наклона головки $15^\circ \pm 1,25^\circ$	0,5
2.	13-900331	$3,6 \pm 0,05$	$17 \pm 0,1$	$2,0 \pm 0,05$	$5 \pm 0,05$	$1,54 \pm 0,05$		0,7
3.	13-900332	$3,6 \pm 0,05$	$20 \pm 0,1$	$2,0 \pm 0,05$	$8 \pm 0,05$	$1,54 \pm 0,05$		0,7
4.	13-900333	$3,6 \pm 0,05$	$23 \pm 0,1$	$2,0 \pm 0,05$	$11 \pm 0,1$	$1,54 \pm 0,05$		0,7
5.	13-900334	$5,5 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2,0 \pm 0,05$	$4,5 \pm 0,05$	$1,73 \pm 0,05$		0,5
6.	13-900335	$5,5 \pm 0,05$	$12 \pm 0,1$	$2,0 \pm 0,05$	$4,5 \pm 0,05$	$1,73 \pm 0,05$		0,5
7.	13-900336	$5,5 \pm 0,05$	$14 \pm 0,1$	$2,0 \pm 0,05$	$6,5 \pm 0,1$	$1,73 \pm 0,05$		0,5
8.	13-900357	$5,5 \pm 0,05$	$17 \pm 0,1$	$2,0 \pm 0,05$	$9,5 \pm 0,1$	$1,73 \pm 0,05$		0,7
9.	13-900358	$5,5 \pm 0,05$	$20 \pm 0,1$	$2,0 \pm 0,05$	$12,5 \pm 0,1$	$1,73 \pm 0,05$		0,7
10.	13-900337	$7 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2,0 \pm 0,05$	$4,5 \pm 0,05$	$2,06 \pm 0,05$		0,5
11.	13-900338	$7 \pm 0,05$	$12 \pm 0,1$	$2,0 \pm 0,05$	$5 \pm 0,05$	$2,06 \pm 0,05$		0,5
12.	13-900376	$3,6 \pm 0,05$	$12 \pm 0,1$	$2,0 \pm 0,05$	$4 \pm 0,05$	$1,54 \pm 0,05$		0,5
13.	13-900377	$3,6 \pm 0,05$	$26 \pm 0,1$	$2,0 \pm 0,05$	$14 \pm 0,1$	$1,54 \pm 0,05$		0,8
14.	13-900378	$3,6 \pm 0,05$	$29 \pm 0,1$	$2,0 \pm 0,05$	$17 \pm 0,1$	$1,54 \pm 0,05$		0,8
15.	13-900397	$3,6 \pm 0,05$	$8 \pm 0,1$	$2,0 \pm 0,05$	$3 \pm 0,05$	$1,54 \pm 0,05$		0,5
16.	13-900398	$3,6 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2,0 \pm 0,05$	$3 \pm 0,05$	$1,54 \pm 0,05$		0,5

17.	13-900379	4,6±0,05	8±0,1	2,0±0,05	3±0,05	1,77±0,05		0,5
18.	13-900380	4,6±0,05	10±0,1	2,0±0,05	4±0,05	1,77±0,05		0,5
19.	13-900381	4,6±0,05	12±0,1	2,0±0,05	6±0,05	1,77±0,05		0,5
20.	13-900382	4,6±0,05	14±0,1	2,0±0,05	5±0,05	1,77±0,05		0,5
21.	13-900383	4,6±0,05	17±0,1	2,0±0,05	8±0,1	1,77±0,05		0,7
22.	13-900384	4,6±0,05	20±0,1	2,0±0,05	11±0,1	1,77±0,05		0,7
23.	13-900385	4,6±0,05	23±0,1	2,0±0,05	14±0,1	1,77±0,05		0,7
24.	13-900386	4,6±0,05	6±0,1	2,0±0,05	17±0,1	1,77±0,05		0,8
25.	13-900387	4,6±0,05	9±0,1	2,0±0,05	19±0,1	1,77±0,05		0,7
26.	13-900388	4,6±0,05	32±0,1	2,0±0,05	21,5±0,1	1,77±0,05		0,8
27.	13-900389	4,6±0,05	35±0,15	2,0±0,05	26±0,1	1,77±0,05		0,8

III. Имплантаты одноэтапные BECES EX:

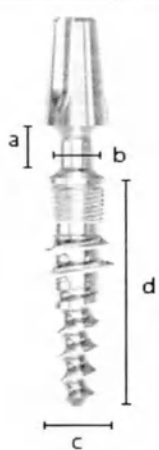
Имплантаты BECES EX с маленькой головкой имеют острую и режущую центральную часть резьбы, которая взаимодействует с кортикальными слоями экстракционных лунок. Апикальная компрессионная резьба обеспечивает идеальную стабильность как в сжатой губчатой, так и в кортикальной кости. Коронковая микрорезьба герметизирует 1-й кортикальный слой, если имплантат используется в заживших участках кости.

Применяемое усилие закручивания – не более 80 Н*см.

Шероховатость поверхности – не более 1,0 мкм.

Диаметр абатмента-мультитюнита – $7,15 \pm 0,03$ мм

Высота абатмента-мультитюнита – $3,97 \pm 0,05$ мм.

Имплантаты одноэтапные BECES EX								
№	Артикул	Диаметр, мм (c)	Длина (внутрикостная), мм (d)	Длина гладкой части, мм (a)	Максимальный диаметр гладкой части, мм(b)	Длина резьбы/шаг резьбы, мм	Масса, г $\pm 0,1$	Общий вид
1.	13-420150	$3,5 \pm 0,05$	$12 \pm 0,1$	$3,5 \pm 0,05$	$2,0 \pm 0,1$	$(13,35/1,46) \pm 0,05$	0,5	
2.	13-420151	$3,5 \pm 0,05$	$15 \pm 0,1$	$3,5 \pm 0,05$	$2,0 \pm 0,1$	$(13,35/1,46) \pm 0,05$	0,5	
3.	13-420152	$4,2 \pm 0,05$	$17 \pm 0,1$	$3,5 \pm 0,05$	$2,0 \pm 0,1$	$(13,35/1,46) \pm 0,05$	0,7	
4.	13-420153	$3,5 \pm 0,05$	$19 \pm 0,1$	$3,5 \pm 0,05$	$2,0 \pm 0,1$	$(13,35/1,46) \pm 0,05$	0,7	
5.	13-420154	$3,5 \pm 0,05$	$21 \pm 0,1$	$3,5 \pm 0,05$	$2,0 \pm 0,1$	$(13,35/1,46) \pm 0,05$	0,7	
6.	13-420155	$3,5 \pm 0,05$	$23 \pm 0,1$	$3,5 \pm 0,05$	$2,0 \pm 0,1$	$(13,35/1,46) \pm 0,05$	0,7	
7.	13-420156	$3,5 \pm 0,05$	$26 \pm 0,1$	$3,5 \pm 0,05$	$2,0 \pm 0,1$	$(13,35/1,46) \pm 0,05$	0,8	
8.	13-420157	$3,5 \pm 0,05$	$29 \pm 0,1$	$3,5 \pm 0,05$	$2,0 \pm 0,1$	$(13,35/1,46) \pm 0,05$	0,8	
9.	13-420160	$4,1 \pm 0,05$	$12 \pm 0,1$	$3,5 \pm 0,05$	$2,0 \pm 0,1$	$(13,35/1,46) \pm 0,05$	0,5	
10.	13-420161	$4,1 \pm 0,05$	$15 \pm 0,1$	$3,5 \pm 0,05$	$2,0 \pm 0,1$	$(13,35/1,46) \pm 0,05$	0,5	
11.	13-420162	$4,1 \pm 0,05$	$17 \pm 0,1$	$3,5 \pm 0,05$	$2,0 \pm 0,1$	$(13,35/1,46) \pm 0,05$	0,7	
12.	13-420163	$4,1 \pm 0,05$	$19 \pm 0,1$	$3,5 \pm 0,05$	$2,0 \pm 0,1$	$(13,35/1,46) \pm 0,05$	0,7	
13.	13-420164	$4,1 \pm 0,05$	$21 \pm 0,1$	$3,5 \pm 0,05$	$2,0 \pm 0,1$	$(13,35/1,46) \pm 0,05$	0,7	
14.	13-420165	$4,1 \pm 0,05$	$23 \pm 0,1$	$3,5 \pm 0,05$	$2,0 \pm 0,1$	$(13,35/1,46) \pm 0,05$	0,7	

IV. Имплантаты одноэтапные ZDI:

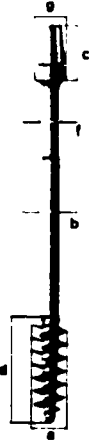
Имплантаты ZDI вставляются либо транссинусально (между мембраной и внешними костями), либо подслизисто в латеральной части верхней челюсти и закрепляются в области скуловой кости. При этом гладкие части имплантата субмукозальны.

Применяемое усилие закручивания – не более 80 Н*см.

Шероховатость поверхности – не более 1,0 мкм.

Диаметр абатмента-мультитюнита – $3,9 \pm 0,05$ мм

Высота абатмента-мультитюнита – $7 \pm 0,1$ мм.

Имплантаты одноэтапные ZDI								
№	Артикул	Диаметр, мм (a)	Длина (внутрикостная), мм	Диаметр имплантата рядом с резьбой (b), мм	Длина резьбы (d), мм	Диаметр верхней части (f), мм	Масса, г $\pm 0,1$	Общий вид
1.	13-900100	$4,6 \pm 0,05$	$35 \pm 0,15$	$2,2 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	0,7	 $g = 3,9 \pm 0,05$ мм $c = 7 \pm 0,1$ мм
2.	13-900101	$4,6 \pm 0,05$	$37,5 \pm 0,15$	$2,2 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	0,7	
3.	13-900102	$4,6 \pm 0,05$	$40 \pm 0,15$	$2,2 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	0,8	
4.	13-900103	$4,6 \pm 0,05$	$42,3 \pm 0,15$	$2,2 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	0,9	
5.	13-900104	$4,6 \pm 0,05$	$45 \pm 0,15$	$2,2 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	0,8	
6.	13-900105	$4,6 \pm 0,05$	$47,5 \pm 0,15$	$2,2 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	0,8	
7.	13-900106	$4,6 \pm 0,05$	$50 \pm 0,15$	$2,2 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	0,8	
8.	13-900107	$4,6 \pm 0,05$	$52,5 \pm 0,15$	$2,2 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	0,8	
9.	13-900108	$4,6 \pm 0,05$	$55 \pm 0,15$	$2,2 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	0,8	

V. Имплантаты одноэтапные ZDI2

Имплантаты ZDI2 вставляются либо транссинусально (между мембраной и внешними костями), либо подслизисто в латеральной части верхней челюсти и закрепляются в области скуловой кости. При этом гладкие части имплантата субмукозальны.

Применяемое усилие закручивания – не более 80 Н*см.

Шероховатость поверхности – не более 1,0 мкм.

Диаметр абатмента-мультиюнита – $3,9 \pm 0,05$ мм

Высота абатмента-мультиюнита – $7 \pm 0,1$ мм.

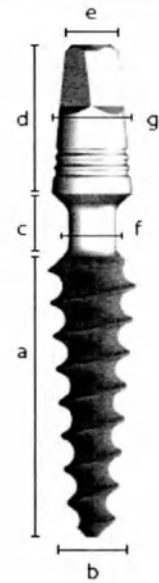
Имплантаты одноэтапные ZDI2								
№	Артикул	Диаметр, мм (a)	Длина (внутрикостная), мм	Диаметр имплантата рядом с резьбой (b), мм	Длина резьбы (d), мм	Диаметр верхней части (f), мм	Масса, г $\pm 0,1$	Общий вид
1.	13-900320	$4,6 \pm 0,05$	$35 \pm 0,15$	$2,2 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	0,7	g=3,9±0,05 мм c=7±0,1 мм
2.	13-900321	$4,6 \pm 0,05$	$37,5 \pm 0,15$	$2,2 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	0,7	
3.	13-900322	$4,6 \pm 0,05$	$40 \pm 0,15$	$2,2 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	0,8	
4.	13-900323	$4,6 \pm 0,05$	$42,5 \pm 0,15$	$2,2 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	0,8	
5.	13-900324	$4,6 \pm 0,05$	$45 \pm 0,15$	$2,2 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	1,0	
6.	13-900325	$4,6 \pm 0,05$	$47,5 \pm 0,15$	$2,2 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	1,0	
7.	13-900326	$4,6 \pm 0,05$	$50 \pm 0,15$	$2,2 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	1,0	
8.	13-900327	$4,6 \pm 0,05$	$52,5 \pm 0,15$	$2,2 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	1,0	
9.	13-900328	$4,6 \pm 0,05$	$55 \pm 0,15$	$2,2 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	1,0	

VI. Имплантаты одноэтапные KOC Classic

Имплантаты KOC Classic имеют компрессионную резьбу и могут поставляться с протоколом немедленной нагрузки, для которого требуется всего несколько рабочих шагов. Конструкция имплантата не имеет микрозазора. Имплантаты изготовлены из высокопрочного титанового сплава.

Применяемое усилие закручивания – не более 50 Н*см. для диаметров 3,0-3,2; 80 Н*см. для диаметров 3,7-5,0

Шероховатость поверхности – не более 1,0 мкм.

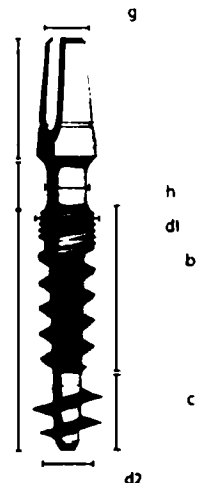
Имплантаты одноэтапные KOC Classic								Общий вид
№	Артикул	Диаметр, мм (b)	Длина (внутрикостная), мм (a)	Длина гладкой части, мм (c)	Максимальный диаметр гладкой части, мм (f)	Шаг резьбы, мм	Масса, г ±0,1	
1.	13-455106	3,7±0,05	6±0,1	3,5±0,05	2,5±0,1	1,5±0,05	0,7	
2.	13-455107	3,7±0,05	8±0,1	3±0,05	2,5±0,1	1,5±0,05	0,7	
3.	13-455108	3±0,05	10±0,1	3±0,05	2,0±0,05	1,5±0,05	0,7	
4.	13-455109	3±0,05	12±0,1	3±0,05	2,0±0,05	1,5±0,05	0,7	
5.	13-455110	3±0,05	15±0,1	3±0,05	2,0±0,05	1,5±0,05	0,7	
6.	13-455111	3,2±0,05	12,8±0,1	3±0,05	2,0±0,05	1,5±0,05	0,3	
7.	13-455112	3,2±0,05	15±0,1	3±0,05	2,0±0,05	1,5±0,05	0,7	
8.	13-455114	3,7±0,05	10±0,1	3±0,05	2,5±0,1	1,5±0,05	0,7	
9.	13-455115	3,7±0,05	12±0,1	3±0,05	2,5±0,1	1,5±0,05	0,7	
10.	13-455120	3,7±0,05	15±0,1	3±0,05	2,5±0,1	1,5±0,05	0,7	
11.	13-455129	4,1±0,05	8±0,1	3,5±0,05	2,0±0,1	1,2±0,05	0,7	
12.	13-455130	4,1±0,05	10±0,1	3,5±0,05	2,0±0,1	1,2±0,05	0,7	
13.	13-455132	4,1±0,05	12±0,1	3±0,05	2,8±0,1	1,5±0,05	0,7	
14.	13-455135	4,1±0,05	15±0,1	3±0,05	2,8±0,1	1,5±0,05	0,7	
15.	13-455136	4,1±0,05	17±0,1	3±0,05	2,8±0,1	1,5±0,05	0,7	
16.	13-455137	4,1±0,05	19±0,1	3±0,05	2,8±0,1	1,5±0,05	0,7	
17.	13-455171	5±0,05	10±0,1	3±0,05	2,8±0,1	1,5±0,05	0,7	
18.	13-455172	5±0,05	12±0,1	3±0,05	2,8±0,1	1,5±0,05	0,7	
19.	13-455173	5±0,05	15±0,1	3±0,05	2,8±0,1	1,5±0,05	0,7	

VII. Имплантаты одноступенчатые KOC PLUS

Имплантаты KOC Plus имеют вертикальные канавки для защиты от вращения и не имеют микрозазоров. Полированная апикальная режущая резьба используется для закрепления в противоположном кортикальном слое. Конструкция имплантата сочетает в себе преимущества компрессионного винта с преимуществами бикортикального винта. Таким образом, помимо компрессии кости, опора находится во 2-й кортикальной кости (противоположная кортикальная кость). Внутрикостная часть снабжена специальной поверхностью No-Itis® с лазерной обработкой. Оптимальная первичная стабильность обеспечена благодаря микрорезьбе и агрессивной апикальной резьбе. Имплантаты KOC PLUS могут использоваться на верхней и нижней челюсти и изготовлены из высокопрочного титанового сплава.

Применяемое усилие закручивания – не более 80 Н*см.

Шероховатость поверхности – не более 1,0 мкм.

Имплантаты одноступенчатые KOC PLUS								
№	Артикул	Диаметр, мм	Длина (внутрикостная), мм	Длина гладкой части, мм	Максимальный диаметр гладкой части, мм	Длина резьбы/шаг резьбы, мм	Масса, г ±0,1	Общий вид
1.	13-455800	4,3±0,05	12,3±0,1	3,3±0,05	2,5±0,05	(10,17/1,52)±0,05	0,7	
2.	13-455801	3,7±0,05	11±0,1	3,5±0,05	2,5±0,05	(10,17/1,52)±0,05	0,7	
3.	13-455802	3,7±0,05	13±0,1	3,5±0,05	2,5±0,05	(10,17/1,52)±0,05	0,7	
4.	13-455803	3,7±0,05	16±0,1	3,5±0,05	2,5±0,05	(10,17/1,52)±0,05	0,7	
5.	13-455804	3,7±0,05	20±0,1	3,5±0,05	2,5±0,05	(10,17/1,52)±0,05	0,7	
6.	13-455805	3,7±0,05	23±0,1	3,5±0,05	2,5±0,05	(10,17/1,52)±0,05	0,7	
7.	13-455810	4,1±0,05	6±0,1	3,5±0,05	2,8±0,05	(10,17/1,52)±0,05	0,7	
8.	13-455811	4,1±0,05	9±0,1	3,5±0,05	2,8±0,05	(10,17/1,52)±0,05	0,7	
9.	13-455812	4,1±0,05	11±0,1	3,5±0,05	2,8±0,05	(10,17/1,52)±0,05	0,7	
10.	13-455813	4,1±0,05	13±0,1	3,5±0,05	2,8±0,05	(10,17/1,52)±0,05	0,7	
11.	13-455814	4,1±0,05	20±0,1	3,5±0,05	2,8±0,05	(10,17/1,52)±0,05	0,7	
12.	13-455815	4,1±0,05	16±0,1	3,5±0,05	2,8±0,05	(10,17/1,52)±0,05	0,7	
13.	13-455820	5±0,05	6±0,1	3,5±0,05	2,5±0,05	(10,17/1,52)±0,05	0,7	
14.	13-455821	5±0,05	9±0,1	3,5±0,05	2,8±0,05	(10,17/1,52)±0,05	0,7	
15.	13-455822	5±0,05	11±0,1	3,5±0,05	2,8±0,05	(10,17/1,52)±0,05	0,7	
16.	13-455823	5±0,05	13±0,1	3,5±0,05	2,8±0,05	(10,17/1,52)±0,05	0,7	
17.	13-455824	5±0,05	16±0,1	3,5±0,05	2,8±0,05	(10,17/1,52)±0,05	0,7	

VIII. Имплантаты одноэтапные КОС МУ

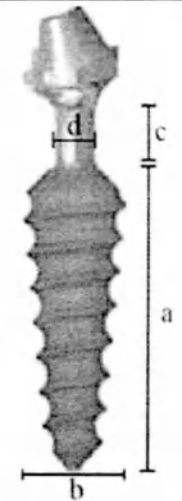
Имплантаты КОС МУ имеют предварительный угол наклона 15° , а также могут быть дополнительно согнуты с помощью инструмента для вставки. В сочетании с клинически возможными ротационными положениями головки могут быть реализованы практически все углы наклона. Имплантаты изготовлены из высокопрочного титанового сплава.

Применяемое усилие закручивания – не более 45 Н*см.

Шероховатость поверхности – не более 1,0 мкм.

Диаметр абатмента-мультиюнита – $4,7 \pm 0,05$ мм

Высота абатмента-мультиюнита – $3,5 \pm 0,05$ мм.

Имплантаты одноэтапные КОС МУ								
№	Артикул	Диаметр внутрикостной части (b), мм	Длина внутрикостной части (a), мм	Диаметр шейки (d), мм	Длина шейки (c), мм	Шаг резьбы, мм	Масса, г $\pm 0,1$	Общий вид
1.	13-455830	$3 \pm 0,05$	$15,7 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	$3 \pm 0,05$	$1,5 \pm 0,05$	0,5	 Угол наклона головки $15^\circ \pm 1,25^\circ$
2.	13-455831	$3,7 \pm 0,05$	$15,7 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	$3 \pm 0,05$	$1,5 \pm 0,05$	0,5	
3.	13-455843	$4,1 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	$3 \pm 0,05$	$1,5 \pm 0,05$	0,7	
4.	13-455832	$4,1 \pm 0,05$	$12 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	$3 \pm 0,05$	$1,5 \pm 0,05$	0,7	
5.	13-455833	$4,1 \pm 0,05$	$15 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	$3 \pm 0,05$	$1,5 \pm 0,05$	0,7	
6.	13-455834	$5 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	$3 \pm 0,05$	$1,5 \pm 0,05$	0,7	
7.	13-455835	$5 \pm 0,05$	$12 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	$3 \pm 0,05$	$1,5 \pm 0,05$	0,7	
8.	13-455838	$3,2 \pm 0,05$	$12 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	$3 \pm 0,05$	$1,5 \pm 0,05$	0,7	
9.	13-455839	$3,2 \pm 0,05$	$15 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	$3 \pm 0,05$	$1,5 \pm 0,05$	0,7	
10.	13-455840	$3,7 \pm 0,05$	$10 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	$3 \pm 0,05$	$1,5 \pm 0,05$	0,7	
11.	13-455841	$3,7 \pm 0,05$	$12 \pm 0,1$	$2 \pm 0,05$	$3 \pm 0,05$	$1,5 \pm 0,05$	0,7	

IX. Имплантаты одноступенчатые КОС Micro

Имплантаты КОС Micro имеют вертикальные канавки для защиты от вращения. Цельная конструкция снижает стоимость, предотвращает опасность периимплантита и предотвращает проблему ослабления винтов. Подходит для всех применений, коронок, мостов и балок. Конструкция имплантата имеет оптимальную первичную стабильность благодаря микрорезьбе и конструкции компрессионного винта. Энossalная часть снабжена специальной поверхностью No-Itis®, обработанной лазером.

Применяемое усилие закручивания – не более 50 Н*см.

Шероховатость поверхности – не более 1,0 мкм.

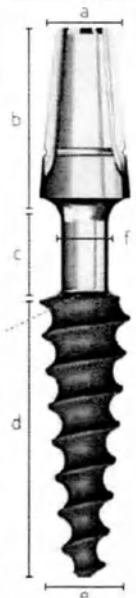
Имплантаты одноступенчатые КОС Micro								Общий вид
№	Артикул	Диаметр внутрикостной части (b), мм	Длина внутрикостной части (a), мм	Диаметр шейки (c), мм	Длина (d), мм	Шаг резьбы, мм	Масса, г ±0,1	
1.	13-455900	3±0,05	10±0,1	7,4±0,1	2±0,05	1,2±0,05	0,7	
2.	13-455901	3±0,05	12±0,1	7,4±0,1	2±0,05	1,2±0,05	0,7	
3.	13-455905	3,2±0,05	12±0,1	7,4±0,1	2±0,05	1,2±0,05	0,7	
4.	13-455906	3,2±0,05	15±0,1	7,4±0,1	2±0,05	1,2±0,05	0,7	
5.	13-455910	3,7±0,05	6±0,1	7,4±0,1	2±0,05	1,2±0,05	0,7	
6.	13-455911	3,7±0,05	8±0,1	7,4±0,1	2±0,05	1,2±0,05	0,7	
7.	13-455912	3,7±0,05	10±0,1	7,4±0,1	2±0,05	1,2±0,05	0,7	
8.	13-455913	3,7±0,05	12±0,1	7,4±0,1	2±0,05	1,2±0,05	0,7	
9.	13-455914	3,7±0,05	15±0,1	7,4±0,1	2±0,05	1,2±0,05	0,7	
10.	13-455920	4,1±0,05	8±0,1	7,4±0,1	2±0,05	1,2±0,05	0,7	
11.	13-455921	4,1±0,05	10±0,1	7,4±0,1	2±0,05	1,2±0,05	0,7	
12.	13-455922	4,1±0,05	12±0,1	7,4±0,1	2±0,05	1,2±0,05	0,7	
13.	13-455923	4,1±0,05	15±0,1	7,4±0,1	2±0,05	1,2±0,05	0,7	
14.	13-455925	5±0,05	10±0,1	7,4±0,1	2±0,05	1,2±0,05	0,7	
15.	13-455926	5±0,05	12±0,1	7,4±0,1	2±0,05	1,2±0,05	0,7	

Х. Имплантаты одноступенчатые KOC Root

Имплантаты KOC ROOT используются для изготовления коронок, мостов и балок. Конструкция компрессионного винта позволяет включить реставрацию в протокол немедленной нагрузки (установка протеза в течение максимум трех дней). Цельная конструкция позволяет снизить затраты, избежать опасности периимплантита и предотвратить проблему ослабления винтов. Имплантаты KOC ROOT прямые с ортопедической головкой для цементирования.

Применяемое усилие закручивания – не более 50 Н*см.

Шероховатость поверхности – не более 1,0 мкм.

Имплантаты одноступенчатые KOC Root							Общий вид
№	Артикул	Диаметр внутрикостной части, мм	Длина внутрикостной части, мм	Диаметр шейки, мм	Шаг резьбы, мм	Масса, г ±0,1	
1.	13-458100	3,0±0,05	6,0±0,1	2,0±0,05	1,43±0,05	0,4	
2.	13-458101	3,0±0,05	8,0±0,1	2,0±0,05	1,43±0,05	0,4	
3.	13-458102	3,0±0,05	10,0±0,1	2,0±0,05	1,43±0,05	0,4	
4.	13-458103	3,0±0,05	12,0±0,1	2,0±0,05	1,43±0,05	0,4	
5.	13-458104	3,0±0,05	14,0±0,1	2,0±0,05	1,43±0,05	0,4	
6.	13-458105	3,0±0,05	16,0±0,1	2,0±0,05	1,43±0,05	0,4	
7.	13-458106	3,0±0,05	18,0±0,1	2,0±0,05	1,43±0,05	0,4	
8.	13-458107	3,0±0,05	20,0±0,1	2,0±0,05	1,43±0,05	0,4	
9.	13-458110	3,5±0,05	6,0±0,1	2,0±0,05	1,48±0,05	0,4	
10.	13-458111	3,5±0,05	8,0±0,1	2,0±0,05	1,48±0,05	0,4	
11.	13-458112	3,5±0,05	10,0±0,1	2,0±0,05	1,48±0,05	0,4	
12.	13-458113	3,5±0,05	12,0±0,1	2,35±0,05	1,48±0,05	0,4	
13.	13-458114	3,5±0,05	14,0±0,1	2,35±0,05	1,48±0,05	0,4	
14.	13-458115	3,5±0,05	16,0±0,1	2,35±0,05	1,48±0,05	0,4	
15.	13-458116	3,5±0,05	18,0±0,1	2,35±0,05	1,48±0,05	0,4	
16.	13-458117	3,5±0,05	20,0±0,1	2,35±0,05	1,48±0,05	0,4	
17.	13-458120	4,0±0,05	6,0±0,1	2,35±0,05	1,47±0,05	0,4	
18.	13-458121	4,0±0,05	8,0±0,1	2,35±0,05	1,47±0,05	0,4	
19.	13-458122	4,0±0,05	10,0±0,1	2,35±0,05	1,47±0,05	0,4	

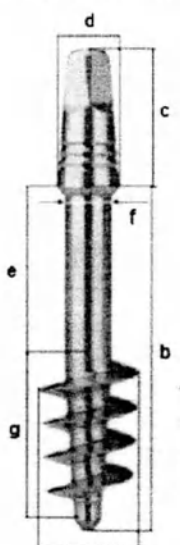
20.	13-458123	4,0±0,05	12,0±0,1	2,35±0,05	1,47±0,05	0,7
21.	13-458124	4,0±0,05	14,0±0,1	2,35±0,05	1,47±0,05	0,7
22.	13-458125	4,0±0,05	16,0±0,1	2,35±0,05	1,47±0,05	0,7
23.	13-458126	4,0±0,05	18,0±0,1	2,35±0,05	1,47±0,05	0,7
24.	13-458127	4,0±0,05	20,0±0,1	2,35±0,05	1,47±0,05	0,7
25.	13-458130	4,5±0,05	6,0±0,1	2,55±0,05	1,5±0,05	0,7
26.	13-458131	4,5±0,05	8,0±0,1	2,55±0,05	1,5±0,05	0,7
27.	13-458132	4,5±0,05	10,0±0,1	2,55±0,05	1,5±0,05	0,7
28.	13-458133	4,5±0,05	12,0±0,1	2,55±0,05	1,5±0,05	0,7
29.	13-458134	4,5±0,05	14,0±0,1	2,55±0,05	1,5±0,05	0,7
30.	13-458135	4,5±0,05	16,0±0,1	2,0±0,05	1,5±0,05	0,7
31.	13-458136	4,5±0,05	18,0±0,1	2,0±0,05	1,5±0,05	0,7
32.	13-458137	4,5±0,05	20,0±0,1	2,0±0,05	1,5±0,05	0,7
33.	13-458140	5,0±0,05	6,0±0,1	2,0±0,05	1,51±0,05	0,7
34.	13-458141	5,0±0,05	8,0±0,1	2,0±0,05	1,51±0,05	0,7
35.	13-458142	5,0±0,05	10,0±0,1	2,0±0,05	1,51±0,05	0,7
36.	13-458143	5,0±0,05	12,0±0,1	2,0±0,05	1,51±0,05	0,7
37.	13-458144	5,0±0,05	14,0±0,1	2,0±0,05	1,51±0,05	0,7
38.	13-458150	5,5±0,05	6,0±0,1	2,0±0,05	1,51±0,05	0,7
39.	13-458151	5,5±0,05	8,0±0,1	2,0±0,05	1,51±0,05	0,7
40.	13-458152	5,5±0,05	10,0±0,1	2,0±0,05	1,51±0,05	0,7
41.	13-458153	5,5±0,05	12,0±0,1	2,35±0,05	1,51±0,05	0,7
42.	13-458154	5,5±0,05	14,0±0,1	2,35±0,05	1,51±0,05	0,7

XI. Имплантаты одноэтапные Strategic Implant

Имплантаты Strategic Implant подходят для фиксации зубных протезов в 1-й, 2-й и, при необходимости, 3-й кортикальной кости. Могут использоваться в зубной лунке при показании сразу же после экстракции и во многих случаях устанавливаться сразу. Поверхность имплантатов механически заглажена на всех участках. Имплантат с самонарезающей резьбой и защитой от внутрикостной ротации изготовлен из высокопрочного титанового сплава. Условно подходит для индивидуальных зубных протезов.

Применяемое усилие закручивания – не более 80 Н*см.

Шероховатость поверхности – не более 1,0 мкм.

№	Артикул	Диаметр, мм (a)	Длина (внутрикостная) , мм (b)	Длина гладкой части, мм (e)	Максимальный диаметр гладкой части, мм (f)	Длина резьбы (g)/шаг резьбы, мм	Масса, г ±0,1	Общий вид
Имплантаты одноэтапные Strategic Implant								
1.	14-900200	2,7±0,05	10±0,1	2,55±0,05	1,4 ± 0,1	4,5±0,05/1,5±0,05	0,5	
2.	14-900201	2,7±0,05	12±0,1	2,95±0,05	1,4 ± 0,1	4,5±0,05/1,5±0,05	0,5	
3.	14-900202	2,7±0,05	14±0,1	2,95±0,05	1,4 ± 0,1	4,5±0,05/1,5±0,05	0,5	
4.	14-900203	2,7±0,05	17±0,1	2,95±0,05	1,4 ± 0,1	4,5±0,05/1,5±0,05	0,7	
5.	14-900204	2,7±0,05	20±0,1	2,95±0,05	1,4 ± 0,1	4,5±0,05/1,5±0,05	0,7	
6.	14-900205	2,7±0,05	23±0,1	1,7±0,01	1,4 ± 0,1	5,5±0,05/1,5±0,05	0,7	
7.	14-900206	2,7±0,05	26±0,1	19,2±0,1	1,4 ± 0,1	5,5±0,05/1,5±0,05	0,8	
8.	14-900207	2,7±0,05	29±0,1	22,2±0,1	1,4 ± 0,1	5,5±0,05/1,5±0,05	0,8	
9.	14-900209	2,7±0,05	32±0,1	25,2±0,1	1,4 ± 0,1	3,5±0,05/1,5±0,05	0,8	
10.	14-900208	3,5±0,05	10±0,1	2,8±0,05	2±0,05	5,5±0,05/1,5±0,05	0,3	
11.	14-900210	3,5±0,05	14±0,1	5±0,05	2±0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,5	
12.	14-900211	3,5±0,05	17±0,1	8±0,1	2±0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,5	
13.	14-900212	3,5±0,05	20±0,1	11±0,1	2±0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,7	
14.	14-900213	3,5±0,05	23±0,1	14±0,1	2± 0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,7	
15.	14-900214	3,5±0,05	26±0,1	17± 0,1	2± 0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,8	
16.	14-900215	3,5±0,05	29±0,1	20± 0,1	2± 0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,8	

№	Артикул	Диаметр, мм (a)	Длина (внутрикостная) , мм (b)	Длина гладкой части, мм (e)	Максимальный диаметр гладкой части, мм (f)	Длина резьбы (g)/шаг резьбы, мм	Масса, г ±0,1	Общий вид
17.	14-900216	3,5±0,05	32±0,1	23± 0,1	2± 0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,8	d=3,35±0,05 мм
18.	14-900217	3,5±0,05	35±0,1	20± 0,1	2± 0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,8	
19.	14-900218	3,5±0,05	38±0,1	29± 0,1	2± 0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,8	
20.	14-900220	4,5±0,05	14±0,1	5±0,05	2,3±0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,5	
21.	14-900221	4,5±0,05	17±0,1	8±0,1	2,3±0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,7	
22.	14-900222	4,5±0,05	20±0,1	11±0,1	2,3±0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,7	
23.	14-900223	4,5±0,05	23±0,1	14±0,1	2,3±0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,7	
24.	14-900224	4,5±0,05	26±0,1	17±0,1	2,3±0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,8	
25.	14-900225	4,5±0,05	29±0,1	20±0,1	2,3±0,05	7,5±0,1/1,5±0,05	0,8	
26.	14-900226	3,5±0,05	12±0,1	5±0,05	2±0,05	5,5±0,05/1,5±0,05	0,5	
27.	14-900250	5,5±0,05	12±0,1	4,5±0,05	2,3±0,05	6,0±0,05/1,73±0,05	0,5	
28.	14-900251	5,5±0,05	14±0,1	6,5±0,01	2,3±0,05	6,0±0,05/1,73±0,05	0,5	
29.	14-900252	5,5±0,05	17±0,1	9,5±0,1	2,3±0,05	6,0±0,05/1,73±0,05	0,7	
30.	14-900253	5,5±0,05	20±0,1	12,5±0,1	2,3±0,05	6,0±0,05/1,73±0,05	0,7	
31.	14-900255	5,5±0,05	8±0,1	3±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/1,73±0,05	0,5	
32.	14-900258	7±0,1	8±0,1	3±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/2,06±0,05	0,5	
33.	14-900260	7±0,1	12±0,1	5±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/2,06±0,05	0,5	
34.	14-900261	7±0,1	14±0,1	7±0,1	2,3±0,05	5,5±0,05/2,06±0,05	0,5	
35.	14-900262	7±0,1	17±0,1	10±0,1	2,3±0,05	5,5±0,05/2,06±0,05	0,7	
36.	14-900263	7±0,1	20±0,1	13±0,1	2,3±0,05	5,5±0,05/2,06±0,05	0,7	
37.	14-900265	5,5±0,05	23±0,1	15,5±0,1	2,3±0,05	6,0±0,05/1,73±0,05	0,7	
38.	14-900266	5,5±0,05	26±0,1	18,5±0,1	2,3±0,05	6,0±0,05/1,73±0,05	0,8	
39.	14-900267	5,5±0,05	29±0,1	21,5±0,05	2,3±0,05	6,0±0,05/1,73±0,05	0,8	
40.	14-900269	9±0,1	8±0,1	2,4±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/2,9±0,05	0,5	
41.	14-900270	9±0,1	10±0,1	2,8±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/2,9±0,05	0,5	
42.	14-900271	9±0,1	14±0,1	6,8±0,1	2,3±0,05	5,5±0,05/2,9±0,05	0,5	
43.	14-900272	12±0,1	10±0,1	2,7±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/3,4±0,05	0,5	
44.	14-900273	12±0,1	14±0,1	6±0,05	2,3±0,05	6,5±0,1/3,4±0,05	0,5	

№	Артикул	Диаметр, мм (а)	Длина (внутрикостная) , мм (b)	Длина гладкой части, мм (e)	Максимальный диаметр гладкой части, мм (f)	Длина резьбы (g)/ шаг резьбы, мм	Масса, г ±0,1	Общий вид
45.	14-900274	9±0,1	12±0,1	4,8±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/2,9±0,05	0,5	
46.	14-900275	12±0,1	12±0,1	4±0,05	2,3±0,05	6,5±0,1/3,4±0,05	0,5	
47.	14-900276	10,5±0,1	10±0,1	2,8±0,05	2,4±0,05	6,5±0,1/3,3±0,05	0,5	
48.	14-900277	10,5±0,1	12±0,1	4±0,05	2,4±0,05	6,5±0,1/3,3±0,05	0,5	
49.	14-900278	10,5±0,1	14±0,1	6±0,1	2,4±0,05	6,5±0,1/3,3±0,05	0,5	
50.	14-900279	12±0,1	8±0,1	2,5±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/3,4±0,05	0,5	
51.	14-900280	10,5±0,1	17±0,1	9±0,1	2,4±0,05	6,5±0,1/3,3±0,05	0,7	
52.	14-900281	5,5±0,05	10±0,1	4,5±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/1,73±0,05	0,5	
53.	14-900282	7±0,1	10±0,1	4,5±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/2,06±0,05	0,5	
54.	14-900284	3,6±0,05	12±0,1	6±0,05	2±0,05	5±0,05/1,54±0,05	0,5	
55.	14-900285	3,6±0,05	10±0,1	4±0,05	2±0,05	5±0,05/1,54±0,05	0,5	
56.	14-900286	3,6±0,05	14±0,1	5±0,05	2±0,05	7,5±0,1/1,54±0,05	0,5	
57.	14-900287	3,6±0,05	17±0,1	8±0,1	2±0,05	7,5±0,1/1,54±0,05	0,7	
58.	14-900288	3,6±0,05	20±0,1	11±0,1	2±0,05	7,5±0,1/1,54±0,05	0,7	
59.	14-900289	3,6±0,05	23±0,1	14±0,1	2±0,05	7,5±0,1/1,54±0,05	0,7	
60.	14-900290	3,6±0,05	26±0,1	17±0,1	2±0,05	7,5±0,1/1,54±0,05	0,8	
61.	14-900291	3,6±0,05	29±0,1	20±0,1	2±0,05	7,5±0,1/1,54±0,05	0,8	
62.	14-900292	4,6±0,05	10±0,1	4±0,05	2,2±0,05	5,5±0,05/1,77±0,05	0,5	
63.	14-900293	4,6±0,05	14±0,1	5±0,05	2,2±0,05	7,5±0,1/1,77±0,05	0,5	
64.	14-900294	4,6±0,05	17±0,1	8±0,1	2,2±0,05	7,5±0,1/1,77±0,05	0,7	
65.	14-900295	4,6±0,05	20±0,1	11±0,1	2,2±0,05	7,5±0,1/1,77±0,05	0,7	
66.	14-900296	4,6±0,05	23±0,1	14±0,1	2,2±0,05	7,5±0,1/1,77±0,05	0,7	
67.	14-900297	4,6±0,05	26±0,1	17±0,1	2,2±0,05	7,5±0,1/1,77±0,05	0,8	
68.	14-900298	4,6±0,05	29±0,1	20±0,1	2,2±0,05	7,5±0,1/1,77±0,05	0,8	
69.	14-900299	4,6±0,05	8±0,1	3±0,05	2,2±0,05	5,5±0,05/1,77±0,05	0,5	
70.	14-900300	4,6±0,05	12±0,1	6±0,05	2,2±0,05	5,5±0,05/1,77±0,05	0,5	
71.	14-900330	3,6±0,05	14±0,1	5±0,05	2±0,05	7,5±0,1/1,54±0,05	0,5	
72.	14-900331	3,6±0,05	17±0,1	8±0,1	2±0,05	7,5±0,1/1,54±0,05	0,7	

№	Артикул	Диаметр, мм (a)	Длина (внутрикостная) , мм (b)	Длина гладкой части, мм (e)	Максимальный диаметр гладкой части, мм (f)	Длина резьбы (g)/шаг резьбы, мм	Масса, г ±0,1	Общий вид
73.	14-900332	3,6±0,05	20±0,1	11±0,1	2±0,05	7,5±0,1/1,54±0,05	0,7	
74.	14-900333	3,6±0,05	23±0,1	14±0,1	2±0,05	7,5±0,1/1,54±0,05	0,7	
75.	14-900334	5,5±0,05	10±0,1	4,5±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/1,73±0,05	0,5	
76.	14-900335	5,5±0,05	12±0,1	4,5±0,05	2,3±0,05	6±0,05/1,73±0,05	0,5	
77.	14-900336	5,5±0,05	14±0,1	6,5±0,1	2,3±0,05	6±0,05/1,73±0,05	0,5	
78.	14-900337	7±0,1	10±0,1	4,5±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/2,06±0,05	0,5	
79.	14-900338	7±0,1	12±0,1	5±0,05	2,3±0,05	5,5±0,05/2,06±0,05	0,5	
80.	14-900376	3,6±0,05	12±0,1	6±0,05	2±0,05	5±0,05/1,54±0,05	0,5	
81.	14-900377	3,6±0,05	26±0,1	17±0,1	2±0,05	7,5±0,1/1,54±0,05	0,8	
82.	14-900378	3,6±0,05	29±0,1	20±0,1	2±0,05	7,5±0,1/1,54±0,05	0,8	
83.	14-900397	3,6±0,05	8±0,1	4±0,05	2±0,05	5,5±0,05/1,54±0,05	0,5	
84.	14-900398	3,6±0,05	10±0,1	4±0,05	2±0,05	5,5±0,05/1,54±0,05	0,5	
85.	14-900379	4,6±0,05	8±0,1	3±0,05	2,2±0,05	5,5±0,05/1,77±0,05	0,5	

ХII. Имплантаты одноэтапные TPG Uno

Имплантаты TPG uno с маленькой головкой имеют острую и режущую центральную часть резьбы, которая взаимодействует с кортикальными слоями экстракционных лунок. Апикальная компрессионная резьба обеспечивает идеальную стабильность как в сжатой губчатой, так и в кортикальной кости. Коронковая микрорезьба герметизирует 1-й кортикальный слой, если имплантат используется в заживших участках кости. Имплантаты TPG uno с маленькой головкой можно использовать как в лунках экстракции, так и в участках зажившей кости. Они используются для кольцевых мостов и сегментов.

Применяемое усилие закручивания – не более 80 Н*см.

Шероховатость поверхности – не более 1,0 мкм.

Имплантаты одноэтапные TPG Uno								
№	Артикул	Диаметр внутрикостной части, мм (e)	Длина внутрикостной части, мм (d)	Шаг резьбы, мм	Масса, г ±0,1	Длина гладкой части, мм (c)	Максимальный диаметр гладкой части, мм (f)	Общий вид
1.	13-420120	4,2±0,05	15,6±0,1	(1,5/0,3)±0,05	0,5±0,1	3,5±0,05	2,05±0,05	
2.	13-420121	4,2±0,05	15,0±0,1	(1,5/0,3)±0,05	0,5 ±0,1	3,5±0,05	2,05±0,05	
3.	13-420122	4,2±0,05	17,0±0,1	(1,5/0,3)±0,05	0,7 ±0,1	3,5±0,05	2,05±0,05	
4.	13-420123	4,2±0,05	19,0±0,1	(1,5/0,3)±0,05	0,7 ±0,1	3,5±0,05	2,05±0,05	
5.	13-420124	4,2±0,05	21,0±0,1	(1,5/0,3)±0,05	0,7 ±0,1	3,5±0,05	2,05±0,05	
6.	13-420125	4,2±0,05	23,0±0,1	(1,5/0,3)±0,05	0,7 ±0,1	3,5±0,05	2,05±0,05	
7.	13-420126	4,2±0,05	26,0±0,1	(1,5/0,3)±0,05	0,8 ±0,1	3,5±0,05	2,05±0,05	
8.	13-420127	4,2±0,05	29,0±0,1	(1,5/0,3)±0,05	0,8 ±0,1	3,5±0,05	2,05±0,05	
9.	13-420130	4,2±0,05	12,0±0,1	(1,5/0,3)±0,05	0,5 ±0,1	4,1±0,05	2,05±0,05	
10.	13-420131	4,2±0,05	15,0±0,1	(1,5/0,3)±0,05	0,5 ±0,1	4,1±0,05	2,05±0,05	
11.	13-420132	4,2±0,05	17,0±0,1	(1,5/0,3)±0,05	0,7 ±0,1	4,1±0,05	2,05±0,05	
12.	13-420133	4,2±0,05	19,0±0,1	(1,5/0,3)±0,05	0,7 ±0,1	4,1±0,05	2,05±0,05	
13.	13-420134	4,2±0,05	21,0±0,1	(1,5/0,3)±0,05	0,7 ±0,1	4,1±0,05	2,05±0,05	
14.	13-420135	4,2±0,05	23,0±0,1	(1,5/0,3)±0,05	0,7 ±0,1	4,1±0,05	2,05±0,05	
15.	13-420170	4,2±0,05	12,0±0,1	(1,5/0,3)±0,05	0,5 ±0,1	3,5±0,05	2,05±0,05	
16.	13-420171	4,2±0,05	15,0±0,1	(1,5/0,3)±0,05	0,5 ±0,1	3,5±0,05	2,05±0,05	
17.	13-420172	4,2±0,05	17,0±0,1	(1,5/0,3)±0,05	0,7 ±0,1	3,5±0,05	2,05±0,05	
18.	13-420173	4,2±0,05	19,0±0,1	(1,5/0,3)±0,05	0,7 ±0,1	3,5±0,05	2,05±0,05	
19.	13-420174	4,2±0,05	21,0±0,1	(1,5/0,3)±0,05	0,7 ±0,1	3,5±0,05	2,05±0,05	

20.	13-420175	4,2±0,05	23,0±0,1	(1,5/0,3)±0,05	0,7 ±0,1	3,5±0,05	2,05±0,05	
21.	13-420176	4,2±0,05	26,0±0,1	(1,5/0,3)±0,05	0,8 ±0,1	3,5±0,05	2,05±0,05	
22.	13-420177	4,2±0,05	29,0±0,1	(1,5/0,3)±0,05	0,8 ±0,1	3,5±0,05	2,05±0,05	

ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ

- Имплантаты должны выдерживать сопротивление изгибающей нагрузке не менее 50 Н (5 кгс).
- Применяемое усилие закручивания для фиксации имплантата должно быть не более 90Н*см.
- Шероховатость поверхности должна быть не более 1 мкм.
- Изделия должны поставляться в стерильном виде.
- На поверхности имплантатов не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов и других загрязнений (окалин частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки).
- Имплантаты должны быть устойчивы к воздействию агрессивных биологических сред полости рта.
- Индивидуальная упаковка должна быть герметичной. Критерием предельного состояния является нарушение герметичности.
- Критерии оценки усталостной прочности: максимальная выдерживаемая нагрузка при 5·10⁶ циклов или для испытаний при частоте, менее или равной 2 Гц, – 2·10⁶ циклов (предел усталости)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Протокол операции

Обязательное первичное обследование.

Первичное обследование пациента должно включать в себя следующее:

- Осмотр пациента
- Изучение истории болезни
- Клинические исследования гигиенического состояния полости рта у пациента, зубов, прикуса, пародонта
- Биологические наблюдения
- Рентгенографическая оценка: компьютерная томография (КТ), рентген внутриротовой полости, панорамные снимки и т.д.

Отсутствие надлежащей подготовки практикующего врача является одним из основополагающих факторов, влияющих на успех хирургического этапа имплантации и соответственно на здоровье пациента после установки имплантата.

Хирургический и ортопедический этапы

Следует проявлять осторожность при хирургическом вмешательстве в твёрдые и мягкие ткани ротовой полости для обеспечения процесса остеоинтеграции. Ложё под имплантат должно быть подготовлено с максимальной точностью. Все используемые хирургические инструменты должны быть стерильными. Хирургический этап требует высверливания ложё под имплантат на скорости от 1000 оборотов в минуту для пилотной фрезы и до 40000 оборотов для конечной фрезы диаметром 2 мм. В ходе сверления, ложё под имплантат должно орошаться физраствором в соответствующей строгой последовательности. Соблюдение процедуры орошения, позволит сократить термальное воздействие на кость.

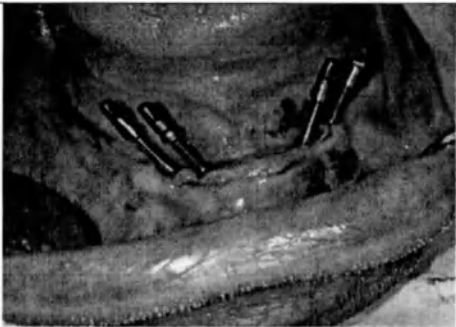
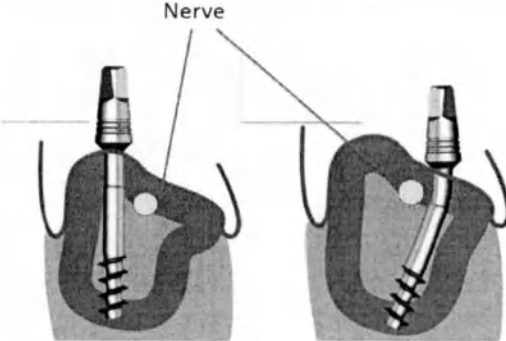
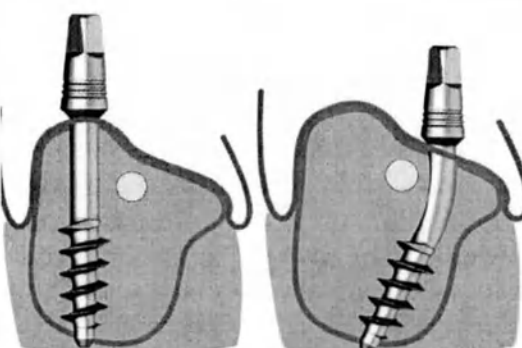
Размер имплантата (диаметр и длина) должен подбираться в соответствии с предварительными рентгенографическими исследованиями ротовой полости пациента.

- Имплантаты должны содержаться в стерильных условиях.
- Имплантаты не подлежат повторной стерилизации.
- Имплантаты предназначены только для однократного применения.
- Во время операции все медицинские изделия должны находиться в стерильных условиях операционной комнаты.
- Не использовать имплантат после истечения срока годности указанного на упаковке.

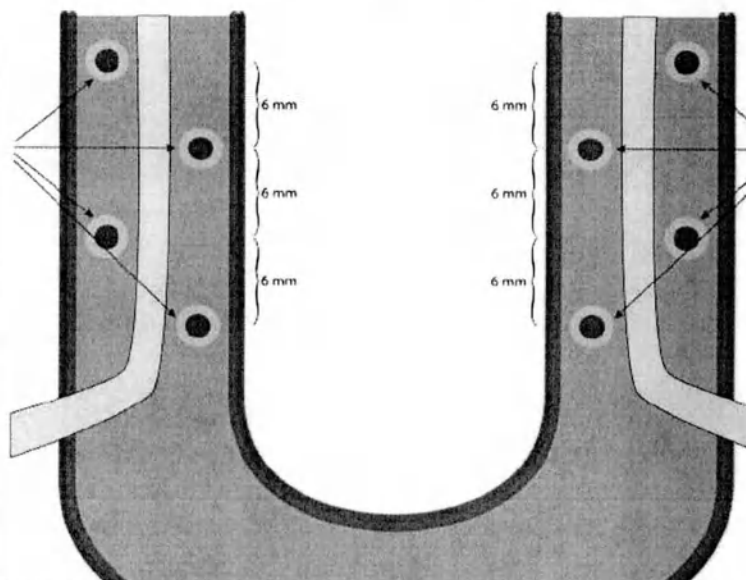
анатомических особенностей и учётом максимальной высоты кости пациента.

Методики установки имплантата

Метод	Описание
1a Общий	Мультинаправленная установка имплантатов, при которой имплантаты устанавливаются под углом друг к другу. Для создания возможности введения ортопедической конструкции осуществляются следующие шаги: Параллельность абатментов (при использовании абатмента) достигается за счет сгибания стержня/шеек имплантатов, или при помощи угловых адаптеров (в качестве промежуточных элементов), или при шлифовании абатментов.
1b Общий	Установка имплантатов в стратегических позициях и добавление дополнительных поддерживающих имплантатов в других областях кости челюсти.
1c Общий	Фиксация имплантатов во 2-ом и 3-ем кортикальном слое, независимо от «альвеолярной кости». Предпочтительными областями для фиксации являются кортикальные области, не подвергающиеся резорбции.
1d Общий	Установка имплантатов Simpladent в случаях активного и тяжелого поражения тканей пародонта. Под прикрытием сильных местных дезинфицирующих средств удаляются зубы и последовательно пораженные мягкие ткани пародонта. Сразу же устанавливаются имплантаты Simpladent, которые потом шинируются при помощи жесткой ортопедической конструкции.
1e Общий	Для фиксации имплантатов следует избегать областей, где располагается губчатая альвеолярная кость. Достижение «костеинтеграции» не является первоочередной задачей лечения при установке имплантатов.
1f Общий	Установка полированных тел имплантатов, изготовленных из материала, пригодного для имплантации, с целью достижения механической фиксации в кортикальных костных зонах челюстно-лицевой области.
1g Общий	Придание имплантату антиротационных свойств за счет сгибания внутрикостной части вертикального стержня имплантата.
1h Общий	Достижение первичной стабильности при помощи вертикальной конденсации губчатой кости за счет широкого тела имплантатов. Широкое тело= большой объем тела имплантата в области резьбы.
Специфические методы	
1	Установка имплантатов между ментальными отверстиями (при адентии нижней челюсти) с или без необходимости фиксации во 2-ом (базальном) кортикальном слое нижней челюсти. Такое позиционирование имеет 3 преимущества: - резьба находится в высоко минерализованной кости - можно обойти нижнечелюстной нерв. - уменьшается промежуточная часть до абатментов дистальных имплантатов (при использовании абатмента).

	
2- Установка одного или двух имплантатов в промежутке между корнем клыка и ментальным отверстием для опоры передней части сегментарного мостовидного протеза.	
2a- Байпас (обход) нерва (Nerve Bypass) Без пенетрации базального кортикального слоя. Стабилизация с использованием сильно минерализованных участков кости (D1-D3)	
2b- Байпас (обход) нерва (Nerve Bypass) с пенетрацией базального кортикального слоя. Необходимый диаметр резьбы 3.5mm или больше	

2 а/б
Байпас (обход)
нерва (Nerve
Bypass)
Соблюдайте
расстояние 6 мм
между
имплантатами в
случае сильной
атрофии в
дистальном отделе
нижней челюсти



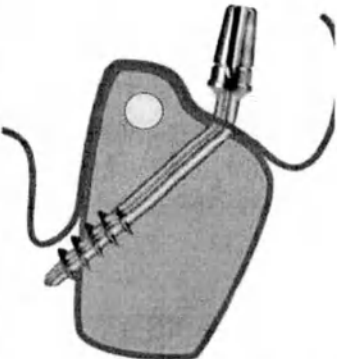
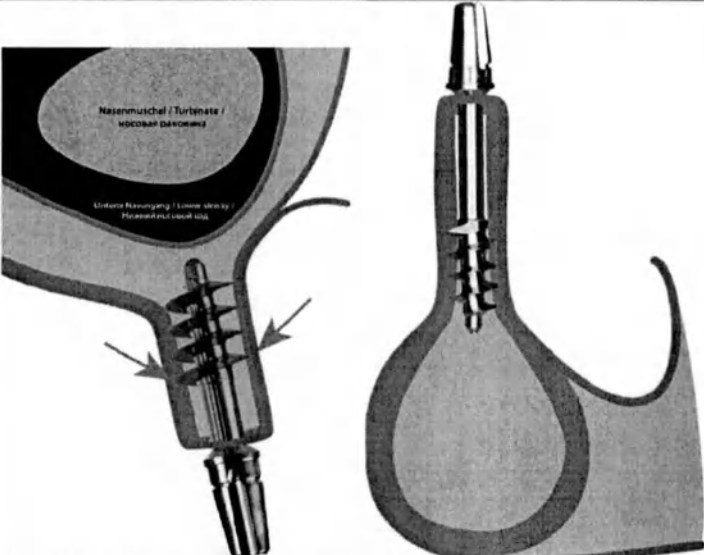
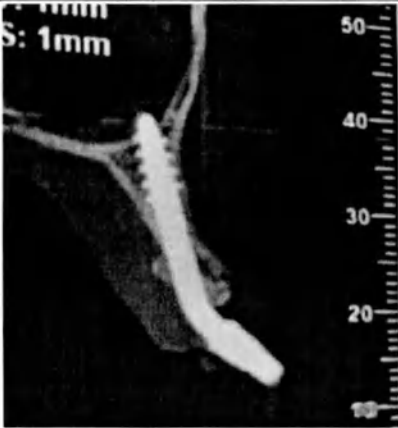
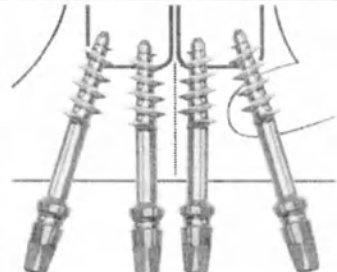
3 Лингвальная
кортикальная
фиксация в
дистальном отделе
нижней челюсти

3а-Лингвальная
кортикальная
фиксация в
дистальном отделе
нижней челюсти.



3б-Вестибулярная
кортикальная
фиксация в
дистальных
отделах нижней
челюсти.
Сверление должно
выполняться с
помощью прямого
наконечника,
чтобы можно было
легко установить
имплантат.



3с-Вестибулярная или лингвальная кортикальная фиксация в дистальном отделе нижней челюсти, когда имплантат проходит ниже нижнечелюстного нерва.	
4-Установка имплантата для фиксации в вестибулярном и небном/лингвальном кортикальном слое; без использования 2-ой кортикальной пластины в осевом направлении.	
5а-Фиксация имплантата в кортикальном слое дна полости носа. При полном проникновении через кортикальную пластину (для обеспечения удержания от экстрозионных и интрузионных сил), а иногда и через слизистую оболочку.	
Полное проникновение в кортикальное дно полости носа для обеспечения удержания от экстрозионных и интрузионных сил	

5b-Установка имплантата непосредственно во 2-ую кортикальную пластину, если не хватает альвеолярной кости (гребень – как острие ножа)



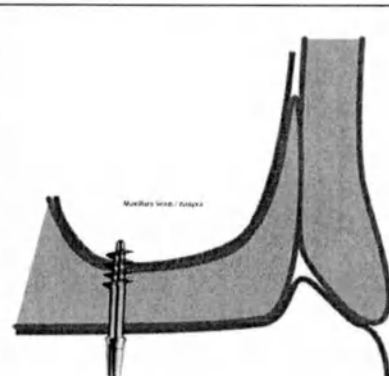
Непосредственная установка имплантата в кортикальную пластинку дна полости носа, при этом имплантат располагается на небной стороне альвеолярного гребня.



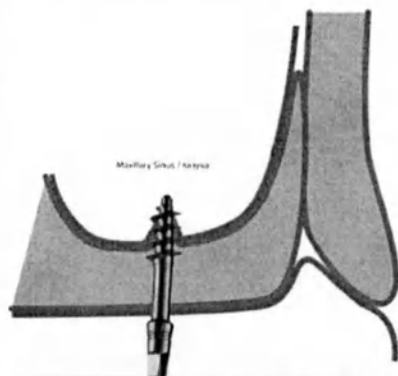
6-Фиксация в кортикальной пластине дна верхнечелюстной пазухи
Разнонаправленная фиксация в кортикальной пластине перегородки (септы) внутри верхнечелюстной



6a-Фиксация в кортикальной пластине дна верхнечелюстной пазухи



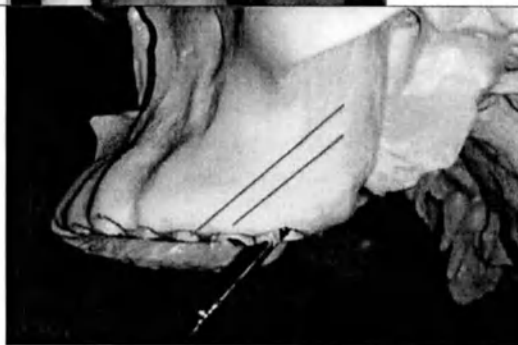
6b-
Разнонаправленная
фиксация в
кортикальной
пластине
перегородки
внутри
верхнечелюстной
пазухи



7-Закрепление
имплантата в
кортикальном дне
полости носа,
начиная с области
14/15, проходя по
небной стороне
корня клыка.

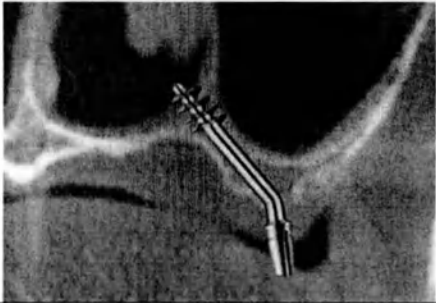
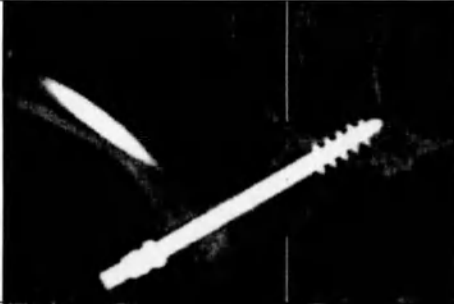
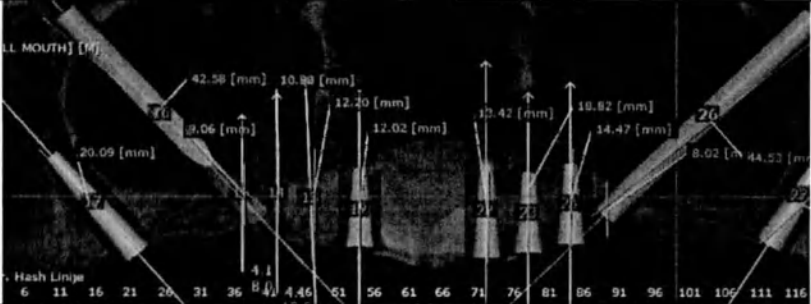
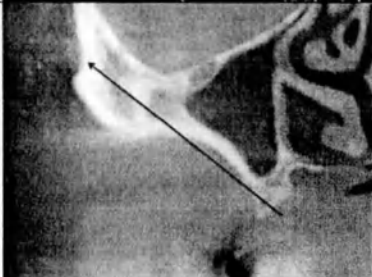


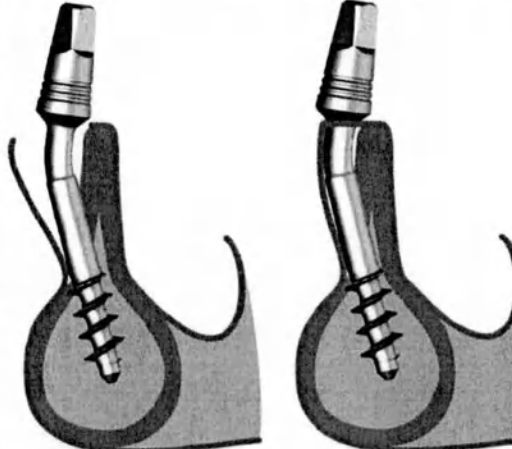
8-Фиксация
дистального
имплантата на
верхней челюсти в
области
соприкосновения
между дистальным
отделом верхней
челюсти и
клиновидной
костью (в области
крыловидного
отростка).



Внутриротовой
вид после
установки и
создания
параллельности
между двумя
бугорно-
крыловидными
имплантатами



9-Установка имплантата в кость по небной стороне верхнечелюстной пазухи.	
9а-Фиксация с и без достижения кортикальной пластины дна полости носа.	
9b-Фиксация имплантата в срединном небном шве верхней челюсти.	
10 Установка имплантата в тело скуловой кости - прямой, внесинусальный - ранссинусальный	
Внесинусальный путь скулового имплантата (анатомия в данном случае позволяет этот тип размещения)	

11-Имплантат устанавливается вестибулярно от острого фронтального гребня Диаметр: 2.7 и 3.0 mm Имплантат иногда бывает субпериостальным. Фиксация резьбой	
12-Фиксация имплантата немного большего диаметра в лунку удаленного ижнего или верхнего премоляра. Диаметр должен быть 4,5 или 5,5мм. Как правило, для размещения двух имплантатов по 5,5 мм в обе лунки нижних или верхних премоляров места недостаточно.	М 
13-Установка одного имплантата диаметром 4,6 - 9 мм в лунку удаленного 1-го или 2-го верхнего моляра. Использование только области небного корня.	

14а-Установка 2-х имплантатов в две отдельные лунки одного верхнего премоляра. Имплантат с небной стороны направлен в сторону дна полости носа.	
14б-Использование 2-х различных лунок после удаления верхнего 1-го или 2-го моляра для установки 2-ух кортико-базальных имплантатов	

Контроль правильности установки имплантата

Способ контроля при дентальной имплантации, включает до- и послеоперационное обследование пациента, непосредственно перед операцией установки имплантатов, в процессе проведения операции и после установки имплантата производят рентгеновские обследования области имплантирования.

График контрольных послеоперационных осмотров в течение периода заживления определяется лечащим врачом. В зависимости от наличия неблагоприятных факторов, таких как курение, системные заболевания организма, наличие в прошлом воспалительных заболеваний пародонта - частота посещения врача может меняться для разных пациентов.

В ходе контрольного осмотра проводится рентген места установки имплантата. На основании снимков врач-стоматолог наблюдает динамику приживления (или не приживления), делает заключение о дальнейшем использовании имплантата для протезирования.

Рекомендуемый перечень инструментов для установки:

1. Инструменты для установки имплантатов дентальных Osstem в наборах, производства "Осстем Имплант Ко., Лтд.", Корея. РУ № РЗН 2018/6956 от 27.03.2018 г.

2. Наборы стоматологических инструментов для установки зубных имплантатов по ТУ 9437-001-44947628-2013, производства ООО "Микрохирургические инструменты", Россия, РУ № РЗН 2015/3495 от 31.12.2015.

3. Инструменты стоматологические марки Biomed для дентальной имплантации, в наборах и отдельных упаковках, производства "Доктор Иде Денталь АГ", Швейцария. РУ № ФСЗ 2012/12239 от 14.06.2012.

Ответственность

Врач обязан сообщить пациенту о возможных побочных эффектах, противопоказаниях, и мерах предосторожности, в случае если эффективность имплантата ставится под сомнение. Немедленный поиск квалифицированного специалиста в случае возникновения каких-либо побочных эффектов является ответственностью пациента.

Гигиена и рекомендации по уходу за имплантатами

Срок службы имплантата напрямую зависит от гигиенического состояния полости рта. Пациент должен знать о том, как поддерживать гигиену полости рта. Пациенту рекомендовано периодическое посещение стоматолога для профилактического осмотра и профессиональной чистки имплантатов.

ИНФОРМАЦИЯ О СРОКЕ ГОДНОСТИ

Срок годности изделия составляет 5 лет с момента стерилизации при условии соблюдении всех требований хранения, которые указаны производителем.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Транспортирование продукции производят всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами, утвержденными в установленном порядке.

При транспортировке обращаться осторожно.

Температура: от +50 до -50 °С.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в хорошо закрытой упаковке в сухих помещениях при температуре от -5 до +55°C при относительной влажности воздуха не более 80%.

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

от +5 до +25°C при относительной влажности воздуха не более 80%.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Техническое обслуживание и ремонт не предусмотрены.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ

Имплантаты, вживленные в челюсть человека, не подлежат утилизации в связи со сроком службы соизмеримым со сроком жизни человека.

Отторгнутые изделия должны быть утилизированы как потенциально зараженные больничные отходы в соответствии с действующим законодательством, как медицинские отходы класса Б (биологически опасные медицинские отходы) в соответствии с правилами больничного учреждения, федеральным или местным законодательствам.

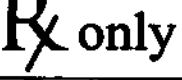
Упаковка изделия после использования подлежит вторичной переработке.

По окончании срока хранения неиспользованное изделие в ненарушенной упаковке утилизируется как медицинские отходы класса А. (биологически не опасные медицинские отходы).

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1. Производитель гарантирует, что изделия изготовлены в соответствии с требованиями действующих стандартов;
2. Гарантия распространяется только на замену бракованного товара, иные претензии исключены.
3. Гарантийный срок - 24 месяца с даты покупки изделий у изготовителя. Гарантия действует весь заявленный срок годности изделия и распространяется на изделия при условии соблюдения условий хранения, транспортировки, эксплуатации.

ТАБЛИЦА РАСШИФРОВКИ СИМВОЛОВ, НАНЕСЕННЫХ НА МАРКИРОВКУ

Символ	Расшифровка
	Сертификат CE
	Номер по каталогу
	Номер партии
	Стерилизация гамма-излучением
	Дата производства
	Производитель
	Не использовать при повреждении упаковки
	Не использовать повторно
 :simpladent-implants.com	Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде.
	QR-код, при сканировании появляются сведения о компании, срок годности и LOT
	Годен до
	Не допускать воздействия влаги
	Только для врача
	Вторичная переработка упаковки
	Штрих-код

	Температурный диапазон
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе.

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ

Изделие не подлежит дезинфекции и предстерилизационной очистке, так как они поставляются стерильными и повторной стерилизации не подлежат.

Перевод с английского и немецкого языков на русский язык

"Симпладент ГмбХ"
(Simpladent GmbH)
Дорфплатц 11
CH-8737 Гоммисвальд
Тел. +41 (0)55 293 23 70
www.simpladent.ch
info@simpladent.ch
Идентификационный номер
плательщика НДС: CHE-
175.160.208

Банковские реквизиты
Райффайзенбанк Бенкен
CHF IBAN CH97 8080 8008 9859 2810 5
EUR IBAN CH94 8080 8006 9613 3271 3
BIC/SWIFT RAIFCH22C56

СЕРТИФИЦИРОВАНО
Стандарты EN ISO 13485
СЕРТИФИЦИРОВАНО
DIN EN ISO 13485
ISO 13485

13-0001-14_Simpladent_08-20_V012

Официальное заверение

Подлинность вышеуказанной и совершенной в моем присутствии подписи господина

д-ра Иде, Штефана Клауса Альфреда, 24.07.1962 г.р., пол: мужской, Германия

Звание, фамилия, имя, дата рождения, пол, гражданство

8737 Гоммисвальд, Дорфплац 11 (Полит. община Гоммисвальд, кантон Санкт-Галлен)

Почтовый индекс, город, адрес

настоящим официально удостоверяется.

Указанное лицо предъявило следующее удостоверение личности:

Персональная идентификационная карта №L4VK738OT, место выдачи: посольство в Белграде

8737 Гоммисвальд, 4-го мая 2024 года

отдел паспортной, регистрационной и миграционной работы

Гоммисвальд

Заместитель руководителя г-жа:

/подпись/

Надя Кесслер

Печать:

ОТДЕЛ ПАСПОРТНОЙ,
РЕГИСТРАЦИОННОЙ И
МИГРАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ГОММИСВАЛЬД

Печать:

Официальный
удостоверитель

Контр. №

757 на контроле по легализации

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Савальским Сергеем Алексеевичем.

Российская Федерация

Город Москва

Тринадцатого мая две тысячи двадцать четвертого года

Я, Юракова Диана Шевкетовна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Корсик Марии Александровны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Савальского Сергея Алексеевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2024-22-3610

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Д.Ш. Юракова

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
58 лист(а)(ов)

врио Нотариуса

