

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Анализатор лабораторный полуавтоматический BTS-350
с принадлежностями**

производства BioSystems S.A. (Испания)

Москва, 2023 г.

1. Анализатор лабораторный полуавтоматический BTS-350, внешний вид, вид спереди и сверху.



2. Анализатор лабораторный полуавтоматический BTS-350, внешний вид, вид снизу и спереди



3. Анализатор лабораторный полуавтоматический BTS-350, внешний вид, вид сзади




4. Анализатор лабораторный полуавтоматический BTS-350, внешний вид, вид сбоку слева с маркировкой на русском языке



Анализатор лабораторный полуавтоматический BTS-350
Серийный номер: 8300002804
Дата производства: 06.2022
Производитель: BioSystems, S.A.
Адрес производителя: Costa Brava, 30, 08030,
Barcelona, Spain, Тел.: +3493-311-0000 Факс: +3493-346-7739
Уполномоченный представитель Производитель ООО "СЗД-Техника
и Развитие" 129137 г. Москва, Ярославская улица, 9-2-106
Тел: +7 (495) 793-38-27
ПУ № ФСЗ 2010/07349 от 20.07.2010 г.


5. Анализатор лабораторный полуавтоматический BTS-350, внешний вид, вид сбоку справа, со встроенным принтером

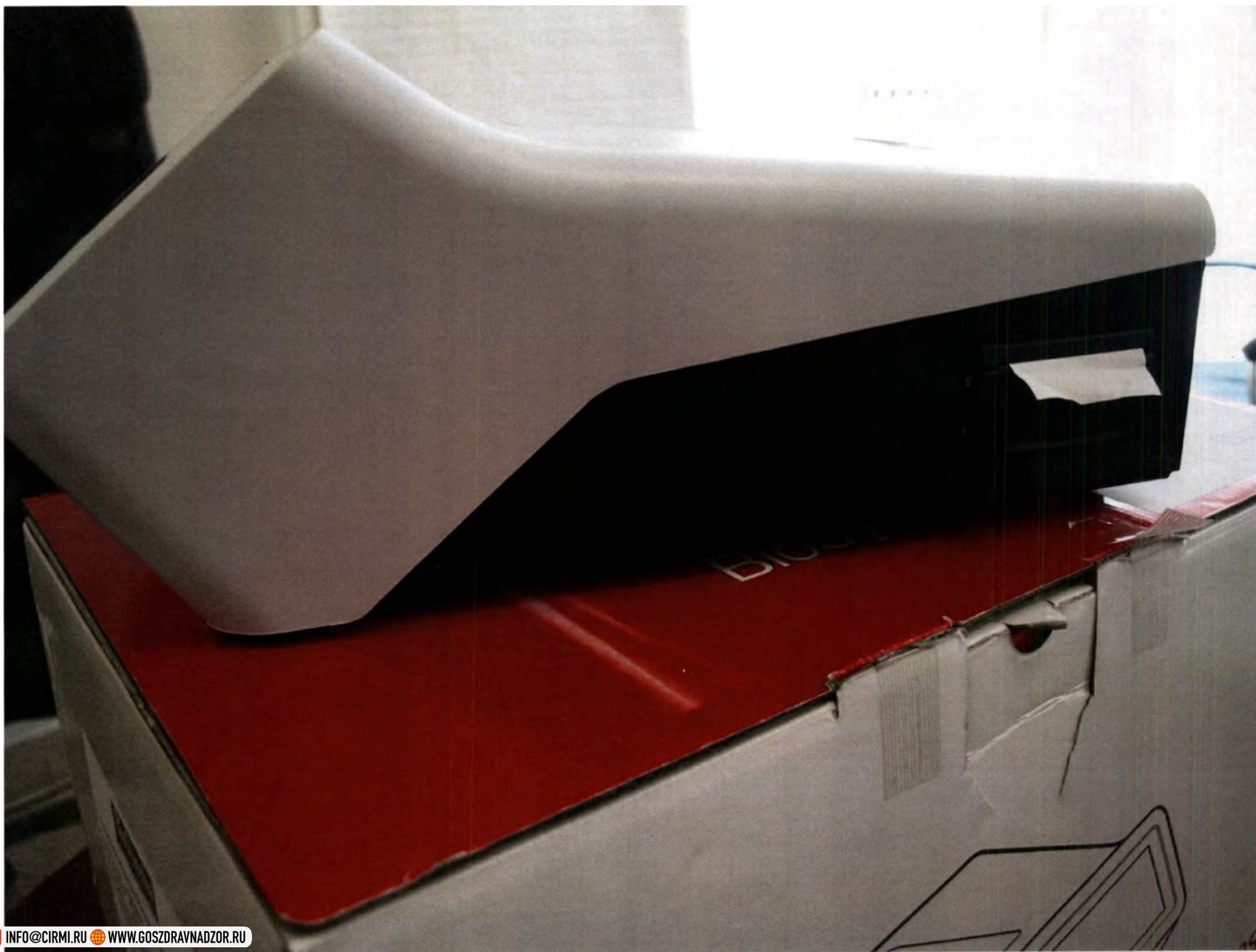


6. Программное обеспечение «ПС фотометр» на CD-диске к Анализатору лабораторному полуавтоматическому BTS-350



7. Программное обеспечение «Фотометр ПС ПРГ» (041) на CD-диске к Анализатору лабораторному полуавтоматическому BTS-350

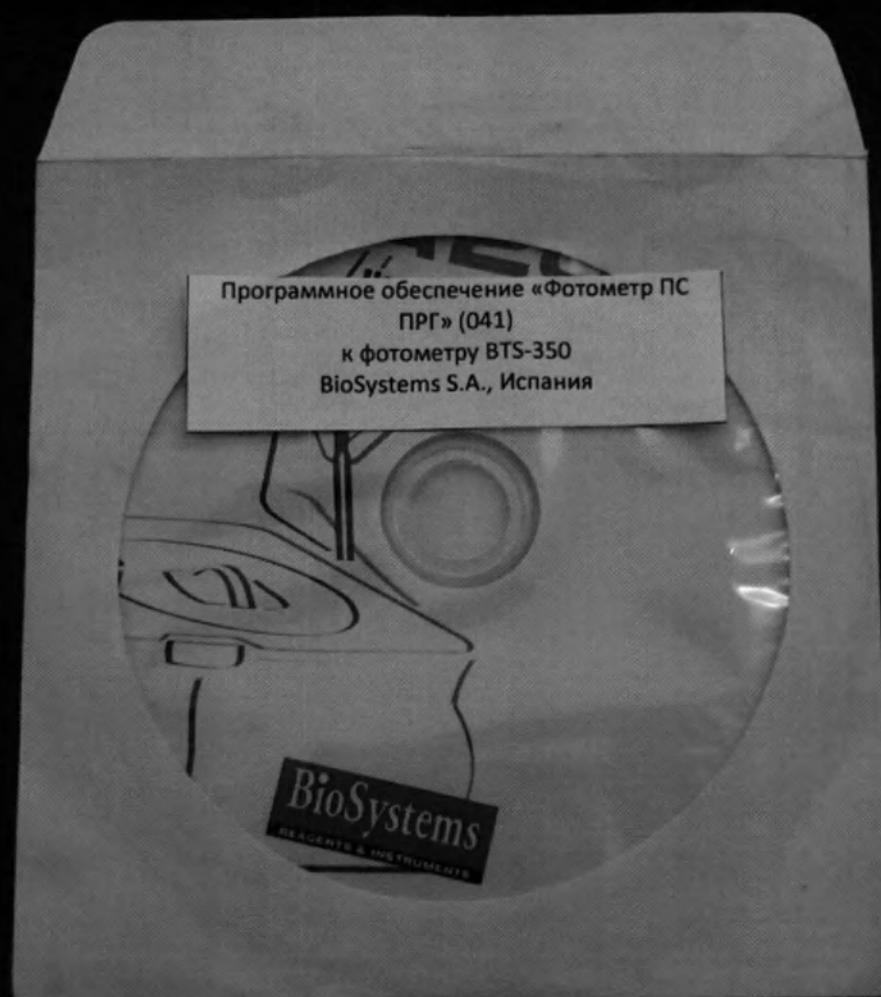

8. Инструкция по сервисному обслуживанию на CD-диске к Анализатору лабораторному полуавтоматическому BTS-350

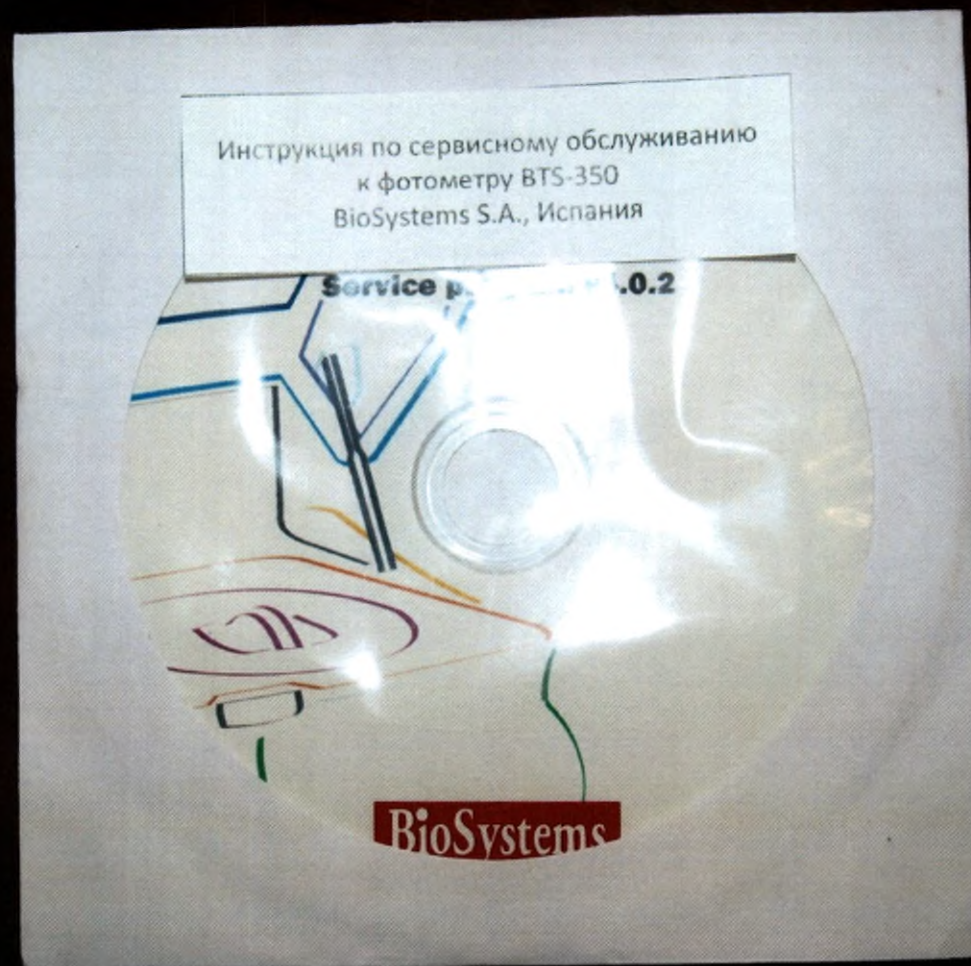

9. Анализатор лабораторный полуавтоматический BTS-350, внешний вид, вид сверху с открытым отсеком для кюветы



10. Сетевой кабель с европейской вилкой и сетевой адаптер к Анализатору лабораторному полуавтоматическому BTS-350



11. Сетевой кабель с американской вилкой к Анализатору лабораторному полуавтоматическому BTS-350



12. Сетевой кабель с английской вилкой к Анализатору лабораторному полуавтоматическому BTS-350



13. Емкость для жидких отходов к Анализатору лабораторному полуавтоматическому BTS-350



14. Проточная кювета с фитингом, тефлоновой, дозирующей, всасывающей трубками, силиконовая трубка, адаптер для тестовых пробирок к Анализатору лабораторному полуавтоматическому BTS-350



15. Лист с инструкцией по распаковке к Анализатору лабораторному полуавтоматическому BTS-350



16. Протокол управления качеством к Анализатору лабораторному полуавтоматическому BTS-350

BioSystems

INSTRUMENT RELEASE CERTIFICATE

Model: BTS

SN: 8300002804

Manufacture date: Jun-22

Photometric accuracy & linearity control

Read the absorbances of the following Std solutions (all described in Biosystems SCP B-058 procedure); compare the result with the corresponding obtained on a calibrated photometer. Results are stated as obtained/reference value ratio.

	Sol. N°	VO/VR	Tolerance
NADH (340nm)	1	0.99	0.95-1.05
	3	1.00	0.97-1.03
	4	1.01	0.97-1.03
	5	1.00	0.95-1.05
	1	1.01	0.95-1.05
4-NP (405nm)	3	1.02	0.97-1.03
	4	1.01	0.97-1.03
	5	1.00	0.95-1.05
	1	1.00	0.95-1.05
	3	1.00	0.97-1.03
CoSO ₄ (505nm)	4	1.00	0.97-1.03
	5	0.99	0.95-1.05

Precision control

Read the absorbance of CoSO₄ Std solution of 0.1 A (Level 1); make 20 replicates. Results stated as CV (%).

CoSO ₄	CV (%)	Tolerance
Level 1	0.61%	<1.25 %

Clinical chemistry control

Using the Biosystems reagents, determine by duplicate the biochemical analytes referred below of one or two control sera (CS), by running the corresponding pre-programmed test applications. Results are stated as obtained/assigned value ratio.

	AST		ASO	
	BCSI	BCSII	RCSI	RCSII
Mean value	51	167	171	273
Range	41.2-61.8	158-228	142-214	218-328

Instrument meets the quality requirements and it is released for sale

BioSystems S.A. Costa Brava 30,
Barcelona (Spain)


Approved by QUALITY CONTROL DEPARTMENT

Date: 08/06/2022


This Instrument Release Certificate is a computer printout and has therefore not been signed by hand.

SCP O-158.61
Rev. 3

17. Источник питания к Анализатору лабораторному полуавтоматическому BTS-350

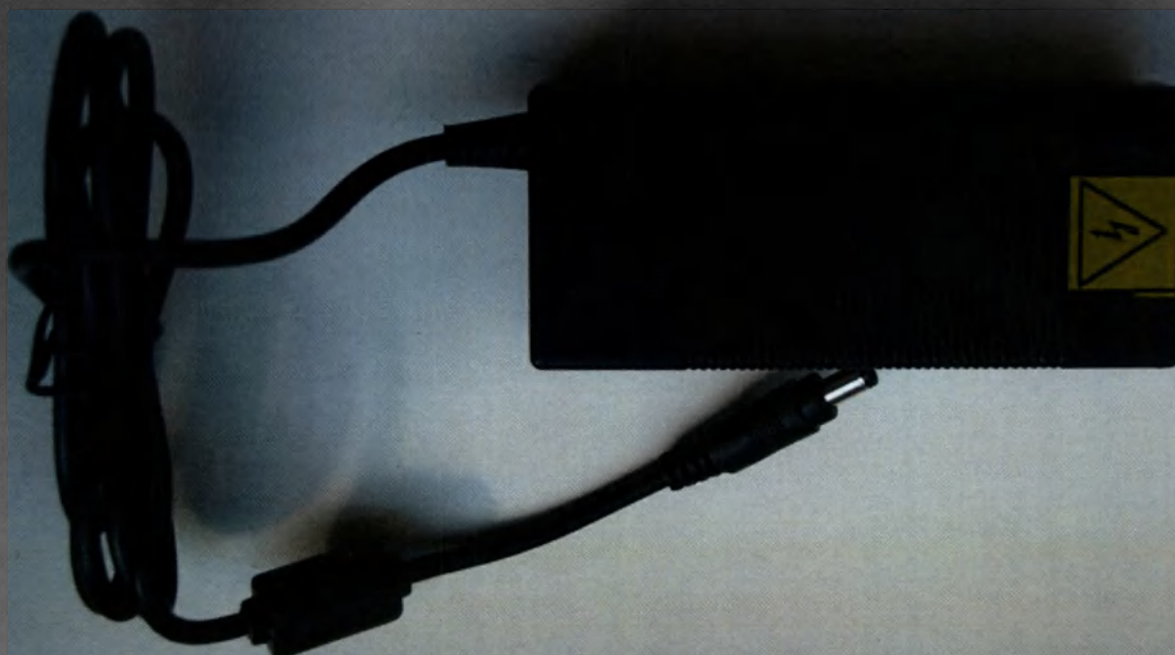

18. Silicon tube for the semi-automatic laboratory analyzer BTS-350

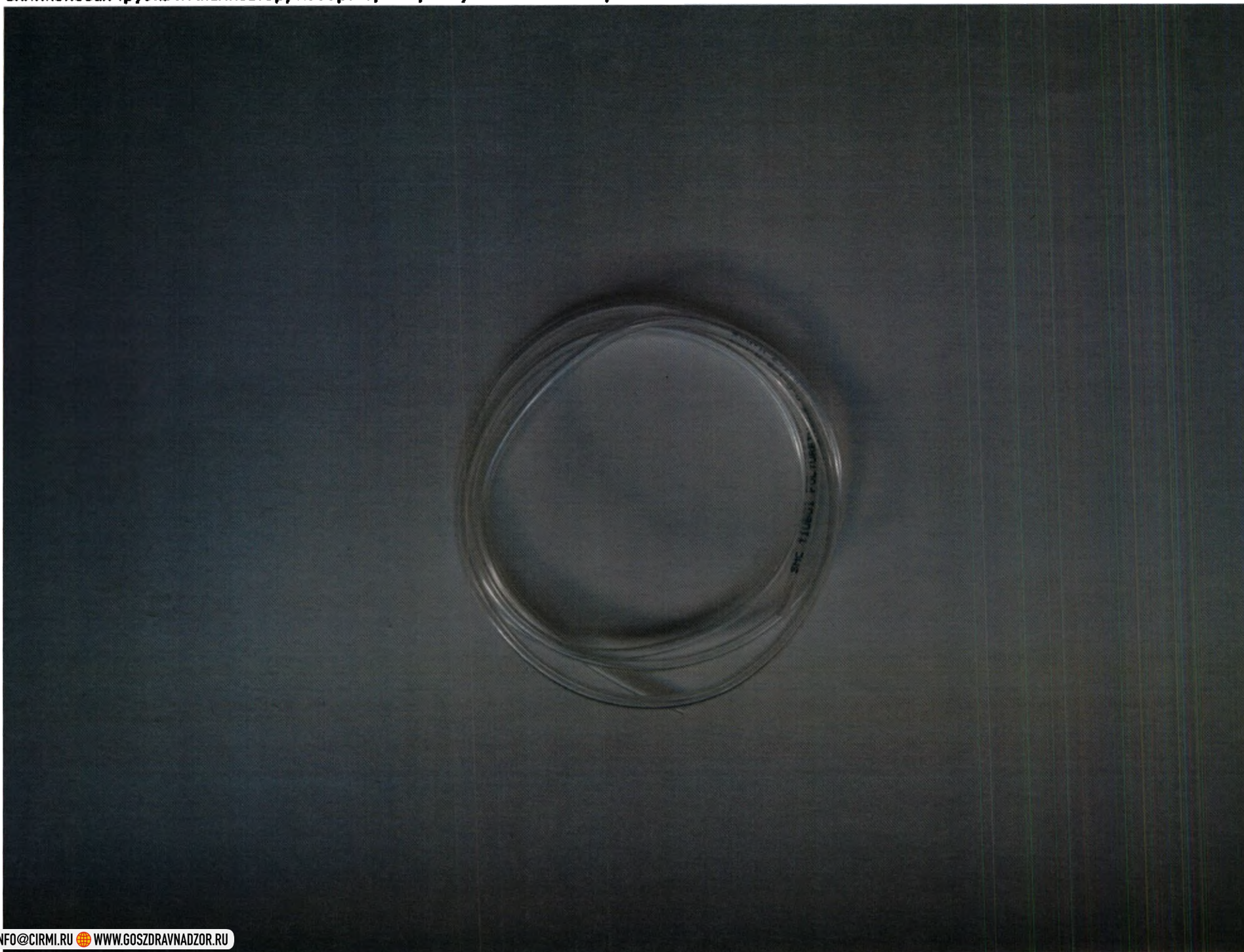

19. Трубка перистальтического насоса с силиконовым цилиндрическим коннектором к Анализатору лабораторному полуавтоматическому BTS-350



20. Рулон термобумаги для принтера к Анализатору лабораторному полуавтоматическому BTS-350



21. Емкость с промывочным раствором (100 мл) к Анализатору лабораторному полуавтоматическому BTS-350




22. Серийный кабель с интерфейсом RS 232 к Анализатору лабораторному полуавтоматическому BTS-350



23. Адаптер для кювет к Анализатору лабораторному полуавтоматическому BTS-350



24. Фильтр вентилятора к Анализатору лабораторному полуавтоматическому BTS-350

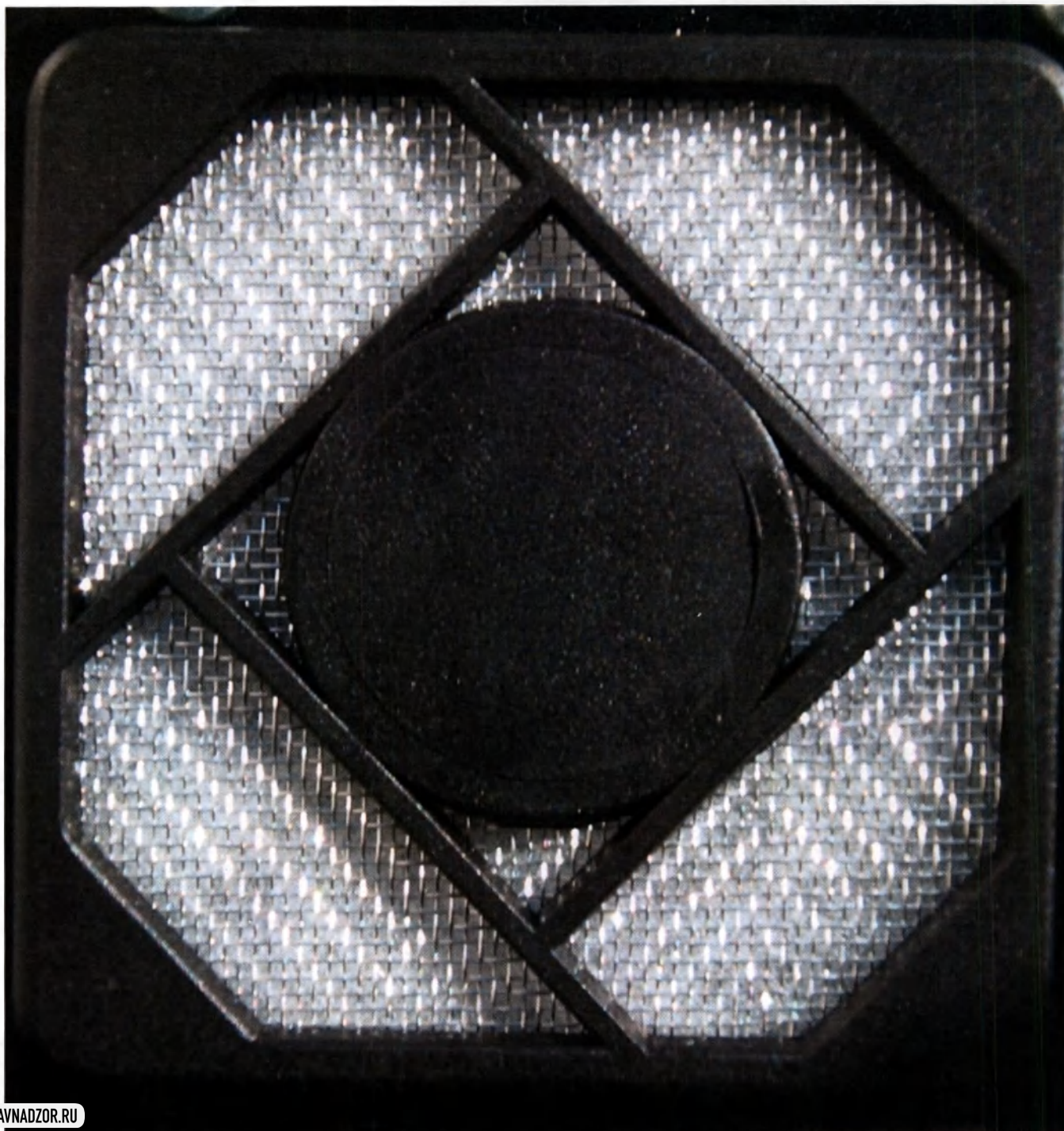

25. Транспортная коробка (упаковка) с маркировкой к Анализатору лабораторному полуавтоматическому BTS-350



26. Транспортная коробка (упаковка, общий вид) к Анализатору лабораторному полуавтоматическому BTS-350



Пронумеровано, прошнуровано,
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
28 (Обязательство)
ЛИСТОВ
Подпись _____
21 ИЮН 2023

