

404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, 11-Б. Тел./факс (8443) 41-30-31, 41-34-03.

Дирекция и Отдел продаж: 400078, г. Волгоград, пр. Ленина, д. 100-А. Тел./факс (8443) 99-99-97, 8(800)777-35-40.

E-mail: vadim_medstar@yahoo.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «НПО «МЕДСТАР»

Матюк В.П.

2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Пероксидная система очистки и дезинфекции контактных
линз всех типов «ЛИКОСЕПТ» по ТУ 21.20.23-012-34704936-
2023**



Пероксидная система очистки и дезинфекции контактных линз всех типов
«ЛИКОСЕПТ», объем 120 мл – общий вид медицинского изделия



Пероксидная система очистки и дезинфекции контактных линз всех типов
«ЛИКОСЕПТ», объем 240 мл – общий вид медицинского изделия



Пероксидная система очистки и дезинфекции контактных линз всех типов
«ЛИКОСЕПТ», объем 360 мл – общий вид медицинского изделия

Медстар
научно-производственная
фирма

ЛИКОСЕПТ

ПЕРОКСИДНАЯ СИСТЕМА

очистки и дезинфекции
контактных линз всех типов
по ТУ 21.20.23-012-34704936-2023

120 мл

ООО НПФ "МЕДСТАР"

Пероксидная система очистки и дезинфекции контактных линз всех типов «ЛИКОСЕПТ»
по ТУ 21.20.23-012-34704936-2023

Назначение медицинского изделия: Предназначено для очистки, дезинфекции,
удаления белковых отложений и хранения контактных линз всех типов.

Хранить в недоступном для детей месте. Хранить раствор в оригинальной упаковке при
температуре от +5 до +40°C и относительной влажности до 80% при 25°C. Использовать
открытый флакон не дольше 3 месяцев. Не использовать раствор с истекшим сроком
годности.

СОСТАВ:

Натрия гипохлорит 0,65%
Калий хлористый 0,10%
Динатрийгидрофосфат, 12-водный 0,35%
ЭДТА динатриевая соль 0,50%
Поливинилпирролидон-400 (ПВП-400) 1,00%
Водорода перекись, 30% водный раствор 10,00%
Вода очищенная до 100%

Способ применения:

- 1) Поместите каждую контактную линзу в соответствующие промаркированные ячейки
держателя контейнера для хранения линз (маркировка «R» - ячейка для правой линзы,
«L» - для левой). Промойте пероксидным раствором каждую линзу, находящуюся в
держателе, в течение не менее 5 секунд.
- 2) Заполните контейнер для хранения линз пероксидным раствором до отметки. Плотно
закройте контейнер крышкой с держателем.
- 3) Поставьте контейнер строго вертикально и оставьте линзы в контейнере не менее
чем на 6 часов для полной нейтрализации раствора. По истечении 6 часов линзы можно
использовать.

По ТУ 21.20.23-012-34704936-2023 РУ № XXXX от XX.XX.XXXX.

Срок действия: не ограничен.

LOT

XXXXXXXXXX

STERILE A



REF

XXXXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XX.XX.XXXX

Срок годности:



Пероксидная система очистки и дезинфекции контактных линз всех типов «ЛИКОСЕПТ», объем 120мл – общий вид
маркировки медицинского изделия после прохождения процедуры государственной регистрации



Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Медстар» (ООО «НПФ «МЕДСТАР»), 400007, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Рионская, д. 4, тел: 7-902-363-4827


СОСТАВ:

Натрия хлорид 0.65%
Калий хлористый 0.10%
Динатрийгидрофосфат, 12-водный 0.35%
ЭДТА динатриевая соль 0.50%
Полиэтиленгликоль-400 (PEG-400) 1.00%
Водорода перекись, 30% водный раствор 10.00%
Вода очищенная до 100%

Способ применения:

- 1) Поместите каждую контактную линзу в соответствующие промаркированные ячейки держателя контейнера для хранения линз (маркировка «R» - ячейка для правой линзы, «L» - для левой).
- 2) Промойте пероксидным раствором каждую линзу, находящуюся в держателе, в течении не менее 5 секунд.
- 3) Заполните контейнер для хранения линз пероксидным раствором до отметки. Плотно закройте контейнер крышкой с держателем. Поставьте контейнер строго вертикально и оставьте линзы в контейнере не менее, чем на 6 часов для полной нейтрализации раствора. По истечении 6 часов линзы можно использовать.

Срок годности:

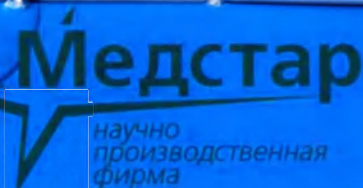

ЛИКОСЕПТ

ПЕРОКСИДНАЯ СИСТЕМА

очистки и дезинфекции
контактных линз всех типов
по ТУ 21.20.23-012-34704936-2023

240 мл

и дезинфекции контактных линз всех типов

ЛИКОСЕПТ

по ТУ 21.20.23-012-34704936-2023

Назначение медицинского изделия:

Предназначено для очистки, дезинфекции, удаления белковых отложений и хранения контактных линз всех типов.

Хранить в недоступном для детей месте. Хранить раствор в оригинальной упаковке при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности до 80% при 25°C. Использовать открытый флакон не дольше 3 месяцев. Не использовать раствор с истекшим сроком годности.


По ТУ 21.20.23-012-34704936-2023

РУ № XXXX от XX.XX.XXXXг.

Срок действия: не ограничен.



Пероксидная система очистки и дезинфекции контактных линз всех типов «ЛИКОСЕПТ», объем 240 мл – общий вид маркировки медицинского изделия после прохождения процедуры государственной регистрации

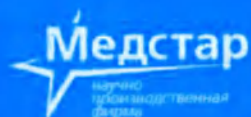

ООО НПФ «МЕДСТАР»

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «МЕДСТАР»
(ООО «НПФ «МЕДСТАР»), 400107,
Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Рубинская, д. 4,
тел. 7-902-363-4827

СОСТАВ:

Натрия хлорид 0,65%
Калий хлористый 0,10%
Динатрийгидрофосфат, 12-водный 0,35%
ЭДТА динатриевая соль 0,50%
Полиэтиленгликоль-400 (ПЭГ-400) 1,00%
Водорода перекись, 30% водный раствор 10,00%
Вода очищенная до 100%

Способ применения:

- 1) Поместите каждую контактную линзу в соответствующие промаркированные ячейки держателя контейнера для хранения линз (маркировка «R» - ячейка для правой линзы, «L» - для левой). Промойте пероксидным раствором каждую линзу, находящуюся в держателе, в течении не менее 5 секунд.
- 2) Заполните контейнер для хранения линз пероксидным раствором до отметки. Плотно закройте контейнер крышкой с держателем.
- 3) Поставьте контейнер строго вертикально и оставьте линзы в контейнере не менее, чем на 6 часов для полной нейтрализации раствора. По истечении 6 часов линзы можно использовать.

Срок годности:



ЛИКОСЕПТ

ПЕРОКСИДНАЯ СИСТЕМА

очистки и дезинфекции
контактных линз всех типов
по ТУ 21.20.23-012-34704936-2023

360 мл

Пероксидная система очистки
и дезинфекции контактных
линз всех типов

ЛИКОСЕПТ

по ТУ 21.20.23-012-34704936-2023

Назначение медицинского изделия:

Предназначено для очистки, дезинфекции,
удаления белковых отложений и хранения
контактных линз всех типов.

Хранить в недоступном для детей месте. Хранить
раствор в оригинальной упаковке при температуре
от +5 до +40°C и относительной влажности до 80%
при 25°C. Использовать открытый флакон не
дольше 3 месяцев. Не использовать раствор с
истекшим сроком годности.

По ТУ 21.20.23-012-34704936-2023

РУ № XXXX от XX.XX.XXXXг.

Срок действия: не ограничен.

STERILE A

XX.XX.XXXXг.

LOT

XXXXXXXXXX

XX.XX.XXXXг.

REF

XXXXXXXXXX



маркировки медицинского изделия после прохождения процедуры государственной регистрации

ЛИКОСЕПТ

Пероксидная система
очистки и дезинфекции
контактных линз всех типов

Медстар
научно-производственная фирма

ООО НПФ "МЕДСТАР"

Общество с ограниченной
ответственностью «Научно-
производственная фирма «МЕДСТАР»
(ООО «НПФ «МЕДСТАР»), 400107,
Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Рязанская, д. 4.

1) ООО «НПФ «МЕДСТАР», Россия,
400078, Волгоградская область, г.
Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, д. 100а.
2) ООО «НПФ «МЕДСТАР», Россия,
404122, Волгоградская область, г.
Волгоград, ул. Горького, д. 11 Б.

СОСТАВ:
Натрия гипохлорит 0,65%
Калий хлороксовый 0,10%
Диметилгидроксифосфат, 12-иодный 0,35%
ЗДТА, динатриевая соль 0,50%
Поливинилпирролидон-400 (ПВЧ-400) 1,00%
Водорода перекись, 30% водный раствор 10,00%
Вода очищенная до 100%

Способ применения:
1) Поместите каждую контактную линзу в
соответствующий промаркированный
ячейку держателя контейнера для
хранения линз (маркировка «R» - ячейка
для правой линзы, «L» - для левой).
Промойте пероксидным раствором
каждую линзу, находящуюся в
держателе, в течение не менее 5 секунд.
2) Заполните контейнер для хранения
линз пероксидным раствором до отметки.
Плотно закройте контейнер крышкой с
держателем.
3) Поставьте контейнер строго
вертикально и оставьте линзы в
контейнере не менее, чем на 6 часов для
полной нейтрализации раствора.
По истечении 6 часов линзы можно
использовать.



Медстар
научно-производственная фирма

ЛИКОСЕПТ

**ПЕРОКСИДНАЯ
СИСТЕМА**

очистки и дезинфекции
контактных линз всех типов
по ТУ 21.20.23-012-34704936-2023

240 мл

Срок годности:

Медстар
научно-производственная фирма

ЛИКОСЕПТ

**ПЕРОКСИДНАЯ
СИСТЕМА**

очистки и дезинфекции
контактных линз всех типов
по ТУ 21.20.23-012-34704936-2023

240 мл

Пероксидная система очистки
и дезинфекции контактных
линз всех типов

ЛИКОСЕПТ

по ТУ 21.20.23-012-34704936-2023

Назначение медицинского изделия:
Предназначено для очистки, дезинфекции,
удаления белковых отложений и окрашивания
контактных линз всех типов.

Хранить в недоступном для детей месте. Хранить
раствор в оригинальной упаковке при
температуре от +5 до +40°C и относительной
влажности до 80% при 25°C. Использовать
открытый флакон не дольше 3 месяцев. Не
использовать раствор с истекшим сроком
годности.

Содержимое упаковки:

1 x Флакон с раствором, объем 240 мл
1 x Контейнер с дионом-нейтрализатором
1 x Инструкция владельца

Меры предосторожности:

- хранение раствора осуществлять в соответствии с инструкцией по применению;
- не допускать попадания раствора в глаза;
- не использовать раствор с истекшим сроком годности;
- не использовать раствор при нарушении целостности контрольного колпачка;
- не использовать уже использованный раствор повторно;
- перед манипуляциями с контактными линзами тщательно вымыть руки с мылом;
- соблюдать рекомендации врача-офтальмолога по режиму ношения и замены контактных линз и уходу за ними;
- не смешивать разные растворы между собой;
- нельзя промывать контактные линзы водой из-под крана;
- при возникновении раздражения, покраснения глаз или аллергической реакции в процессе пользования контактными линзами прекратить использование и обратиться к врачу-офтальмологу;
- не использовать контактные линзы, оказавшиеся поврежденными для дезинфекции в растворе раствора - не менее 6-ти часов. Иначе существует опасность воздействия перекиси водорода на роговицу.

по ТУ 21.20.23-012-34704936-2023
ТУ № XXXX от XX.XX.XXXX.
Срок действия: не ограничен.

STERILE A

LOT

REF

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

Пероксидная система очистки и дезинфекции контактных линз всех типов
«ЛИКОСЕПТ», объем 240 мл – общий вид потребительской упаковки медицинского

издания после прохождения процедуры государственной регистрации



Медстар
научно-производственная фирма

ЛИКОСЕПТ

ПЕРОКСИДНАЯ СИСТЕМА

ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ ВСЕХ ТИПОВ
по ТУ 21.20.23-012-34704936-2023

360мл

Пероксидная система
очистки и дезинфекции
контактных линз всех типов ЛИКОСЕПТ

Медстар
научно-производственная фирма

ООО НПФ «МЕДСТАР»

Общество с ограниченной
ответственностью «научно-
производственная фирма «МЕДСТАР»
(ООО «НПФ «МЕДСТАР»), 400107,
Волгоградская область, г. Волгоград, ул.
Ринская, д. 4,
т/ф: 7-402-363-4827

1) ООО «НПФ «МЕДСТАР», Россия, 400079,
Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт
им. В.И. Ленина, д. 100а
2) ООО «НПФ «МЕДСТАР», Россия, 404122,
Волгоградская область, г. Волжский, ул.
Горького, д. 11 Б.

СОСТАВ:

Натрий хлорид 0,65%
Калий хлоридный 0,10%
Динатрийгидрофосфат, 12-водный 0,35%
ЭДТА динатриевая соль 0,50%
Поливинилпирролидон 400 (ПВП-400) 1,00%
Водорода перекись 30% водный раствор 10,00%
Вода очищенная до 100%

Способ применения:

1) Поместите каждую контактную линзу в
соответствующий промаркированные ячейки
держателя контейнера для хранения линз
(маркировка «R» - ячейка для правой линзы,
«L» - для левой). Промойте пероксидным
раствором каждую линзу, выдерживая в
держателе, в течение не менее 5 секунд.
2) Заполните контейнер для хранения линз
пероксидным раствором до отметки. Плотно
закройте контейнер крышечкой с держателем.
3) Поставьте контейнер строго вертикально
и оставьте линзы в контейнере не менее,
чем на 6 часов для полной нейтрализации
раствора. По истечении 6 часов линзы
можно использовать.



4 607136 210073

ЛИКОСЕПТ

Медстар
научно-производственная фирма

ЛИКОСЕПТ

ПЕРОКСИДНАЯ СИСТЕМА

ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ ВСЕХ ТИПОВ
по ТУ 21.20.23-012-34704936-2023

360мл

Пероксидная система
очистки и дезинфекции
контактных линз всех типов

ЛИКОСЕПТ

по ТУ 21.20.23-012-34704936-2023

Назначение медицинского изделия:
Предназначено для очистки, дезинфекции,
удаления белесых отложений и хранения
контактных линз всех типов.

Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить раствор в герметично закрытом флаконе при
температуре окружающей среды (от +5 до +25 °С).
Использовать открытый флакон не дольше 3 месяцев. Не
использовать раствор с истекшим сроком
годности.

Содержимое упаковки:

1 x Флакон с раствором, объем 360 мл
1 x Контейнер с диском-нейтрализатором
1 x Инструкция-выкладка

Меры предосторожности:

- хранение раствора осуществлять в соответствии
с инструкцией по применению;
- не допускать попадания раствора в глаза;
- не использовать раствор с истекшим сроком
годности;
- не использовать растворы при нарушении
целостности контрольного колпачка;
- не использовать уже использованный раствор
повторно;
- перед манипуляциями с контактными линзами
тщательно вымыть руки с мылом;
- соблюдать рекомендации врача-офтальмолога
по режиму ношения и замены контактных линз и
уходу за ними;
- не смешивать разные растворы между собой
и/или промывать контактные линзы водой из-
под крана;
- при возникновении раздражения, покраснения
глаз или аллергической реакции в процессе
использования контактных линзами прекратить
использование и обратиться к врачу-
офтальмологу;
- не использовать контактные линзы, извлеченные ранее
из раствора для дезинфекции в растворе повторно - не
более 6-ти часов. Иначе существует опасность
воздействия перекиси водорода на роговицу.

по ТУ 21.20.23-012-34704936-2023

RU № XXXX от XXX.XX.XXXX.

Срок действия: не ограничен.

STERILE A

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

REF XXXXXXXXX

LOT XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX


XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Пероксидная система очистки и дезинфекции контактных линз всех типов
«ЛИКОСЕПТ», объем 360 мл – общий вид потребительской упаковки медицинского



Пероксидная система очистки и дезинфекции контактных линз всех типов
«ЛИКОСЕПТ» – общий вид транспортной групповой упаковки медицинского
изделия

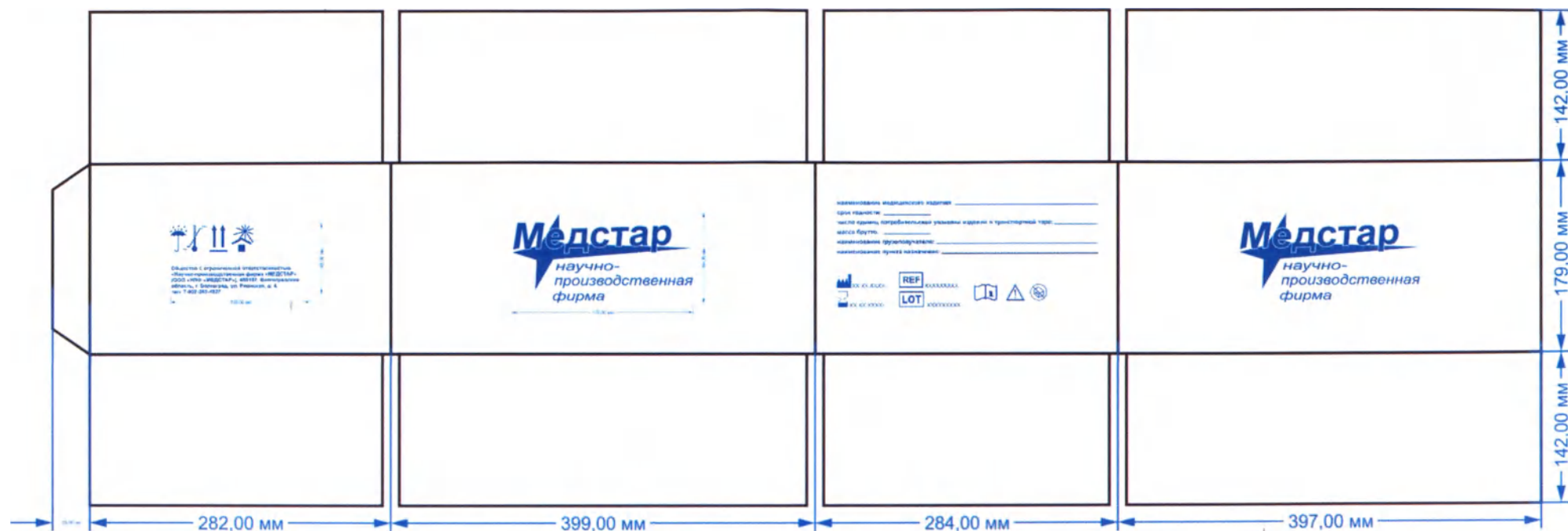

Пероксидная система очистки и дезинфекции контактных линз всех типов «ЛИКОСЕПТ» – макет транспортной групповой упаковки и маркировки медицинского изделия после прохождения процедуры государственной регистрации

11
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

В количестве 14 (ЧЕТЫРНАДЦАТЬ) листов



Директор ООО НПФ «МЕДСТАР»

В.П. Гнатюк