

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «РиГ Групп Ко»

Г.С. Аллахвердиев

«11» июня 2024г.

М.П.



## ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая  
по ТУ 32.50.50-013-38044224-2023**


Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая по ТУ 32.50.50-013-38044224-2023  
 исполнений: Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая, тип A1, с помощью насоса  
 в составе: Мешок для питания с карманом и крышкой, объем 1200 мл – 1 шт; Удлинительная трубка –  
 шт; Капельная камера – 1 шт; Роликовый зажим – 1 шт; Силиконовая трубка для насоса – 1 шт  
 Соединитель трубки для насоса – 1 шт; 3-ходовой порт (Y-коннектор) с коннектором ENFit (с колпачком  
 и/или соединительным кольцом) – 1 шт; Коннектор с колпачком – 1 шт, Бумажная карточка – 1 шт  
 Инструкция по применению, нанесенная на упаковку.



Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая по ТУ 32.50.50-013-38044224-2023  
исполнений: Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая, тип А3  
гравитационная, в составе: Мешок для питания с карманом и крышкой, объем 1200 мл; Удлинительная  
трубка – 1 шт; Капельная камера – 1 шт; Роликовый зажим – 1 шт; Коннектор с колпачком – 1 шт;  
Бумажная карточка – 1 шт; Инструкция по применению, нанесенная на упаковку.

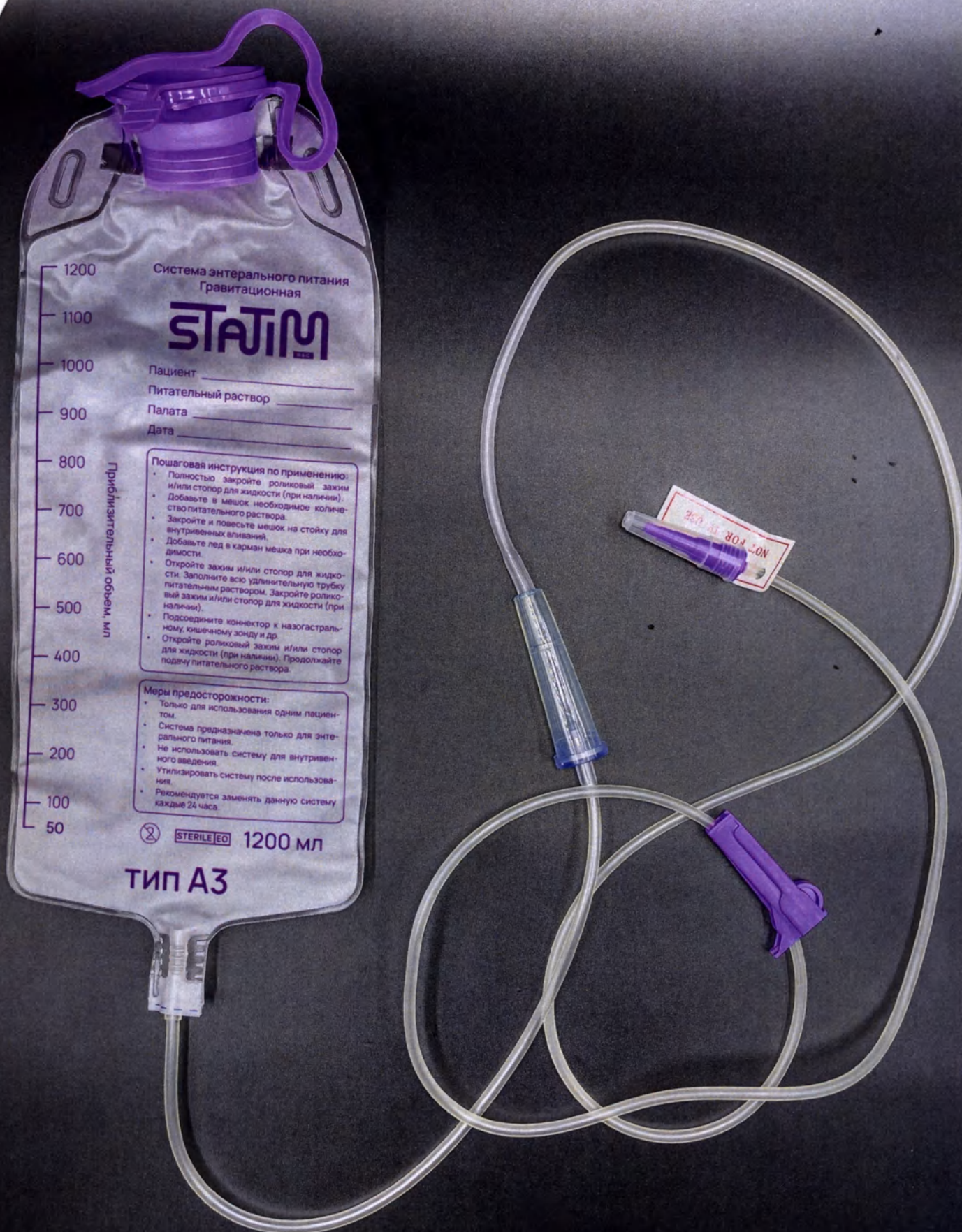


Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая, тип А5, с помощью насоса для двойного кормления. Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая, тип А5, с помощью насоса для двойного кормления. В составе: Мешок для питания с карманом и крышкой, объем 1200 мл – 2 шт. Стопор для жидкости – 2 шт. Удлинительная трубка – 1 шт. Капельная камера – 1 шт. Роликовый зажим – 1 шт. Силиконовая трубка для насоса – 1 шт. Соединитель трубки для насоса – 1 шт. 3-х-ходовой порт (У-коннектор) с клапаном ENFit с кончиком и и и соединительным кольцом – 1 шт. Коннектор с кончиком и и и соединительным кольцом – 1 шт. Инструкция по применению, нанесенная на упаковку.

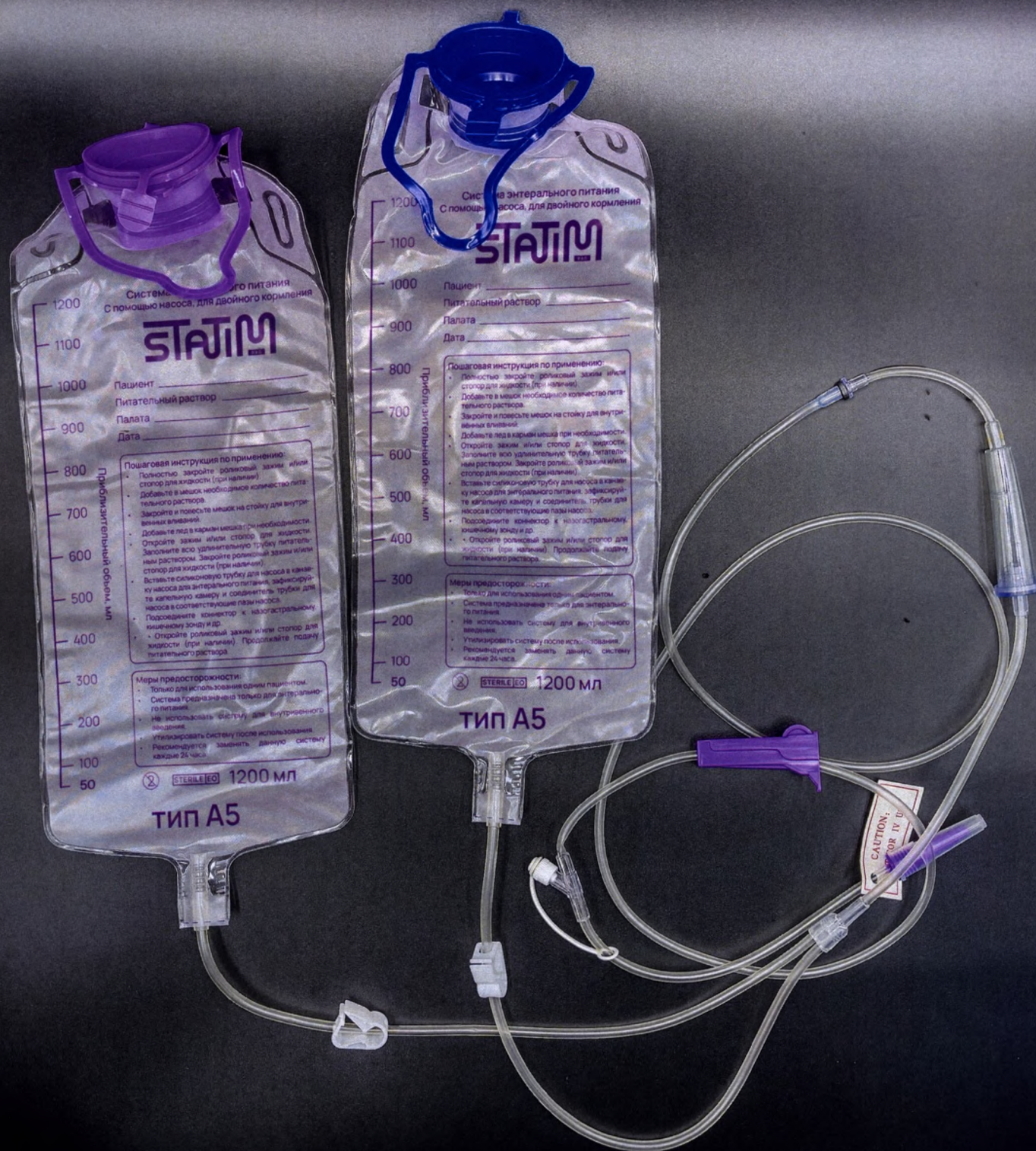





Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая по ТУ 32.50.50-013-38044224-2023  
исполнений: Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая, тип C1, с помощью  
насоса, без мешка, в составе: Энтеральная игла с колпачком – 1 шт; Удлинительная трубка – 1 шт;  
Капельная камера – 1 шт; Роликовый зажим – 1 шт; Силиконовая трубка для насоса – 1 шт;  
Соединитель трубки для насоса – 1 шт; Коннектор с колпачком – 1 шт, Бумажная карточка – 1 шт;

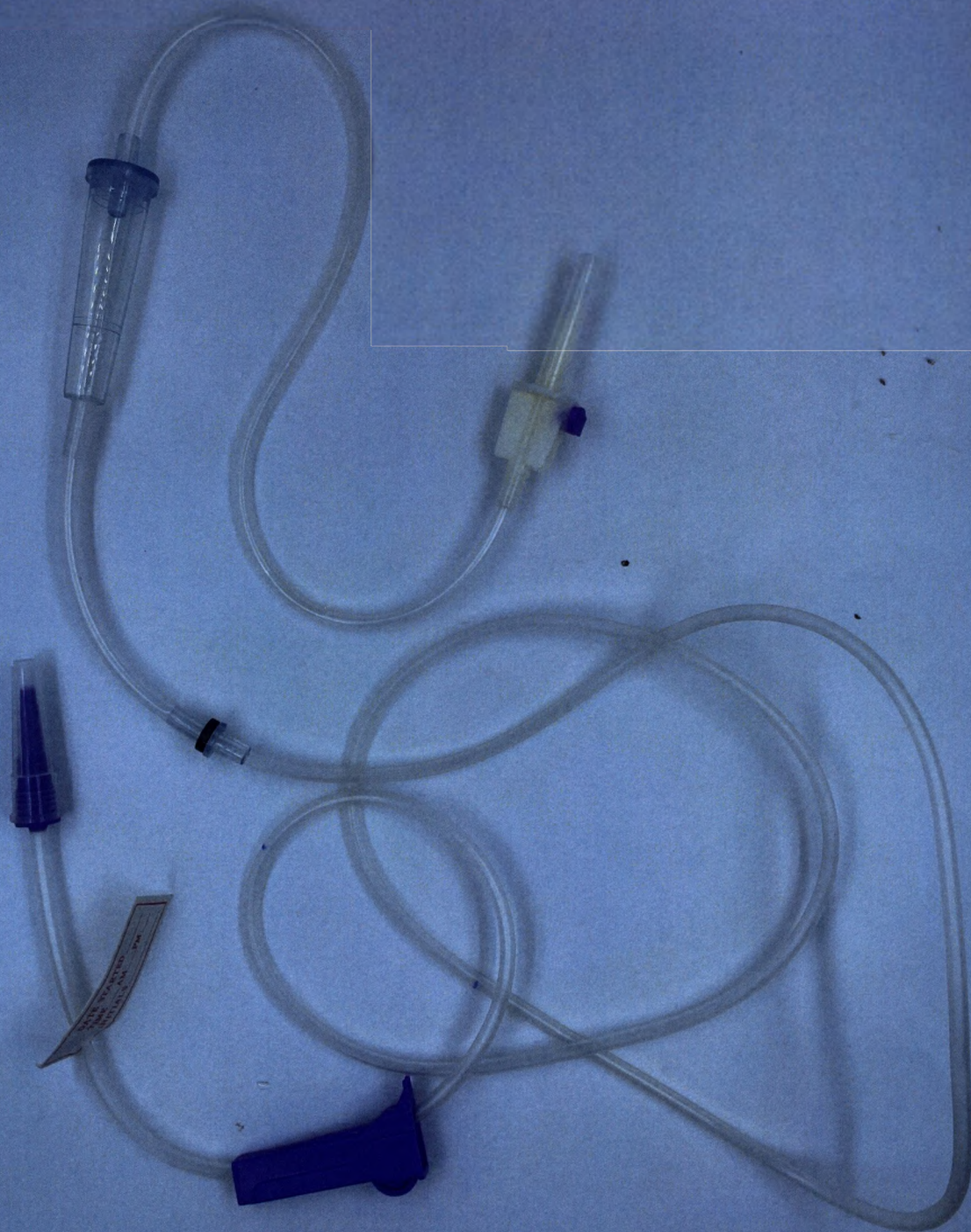


Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая по ТУ 32.50.50-013-38044224-2023, исполнений: Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая, тип СЗ, гравитационная, без мешка, в составе: Энтеральная игла с колпачком – 1 шт; Удлинительная трубка – 1 шт; Капельная камера – 1 шт; Роликовый зажим – 1 шт; Коннектор с колпачком – 1 шт, Бумажная карточка – 1 шт;

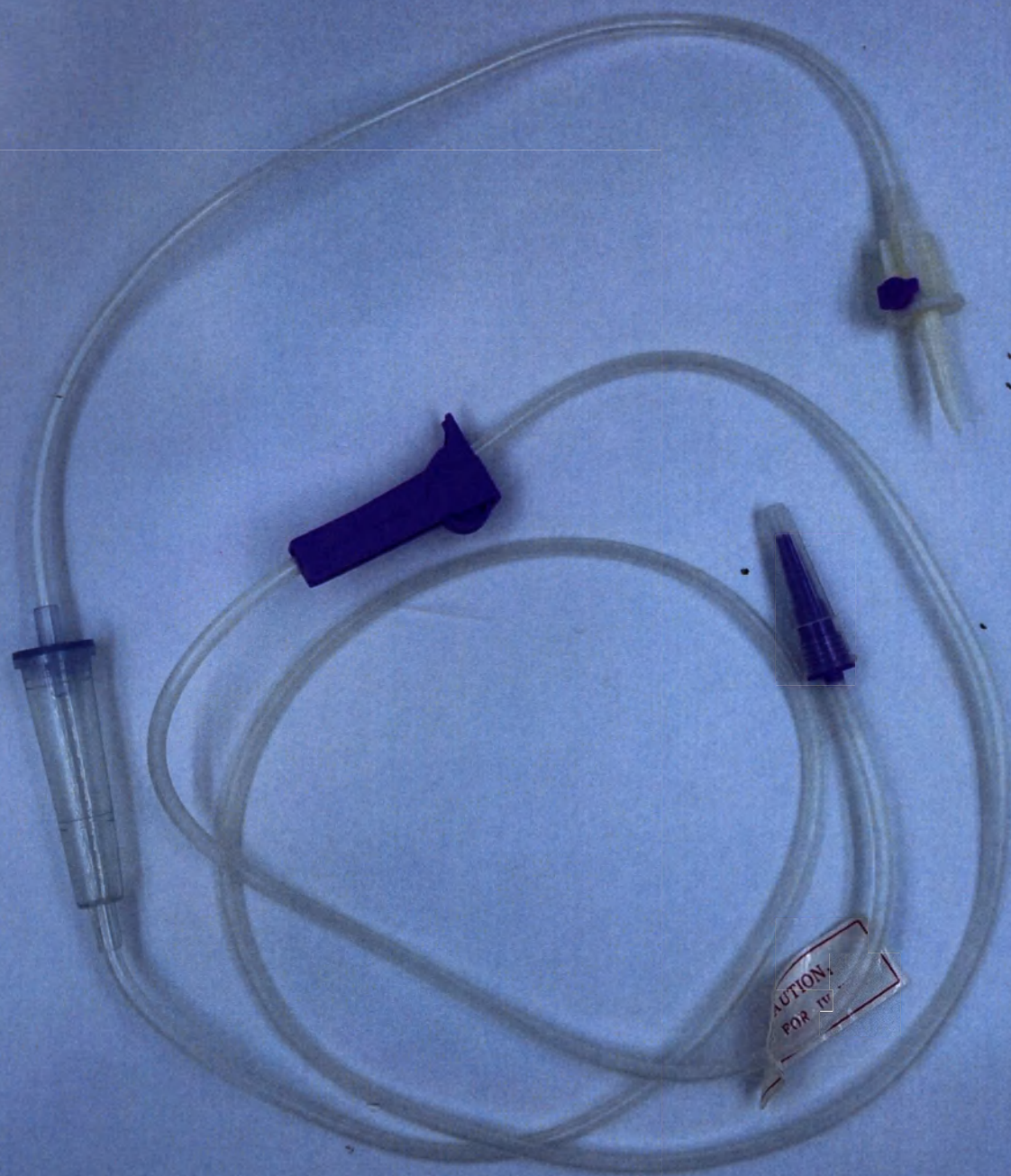

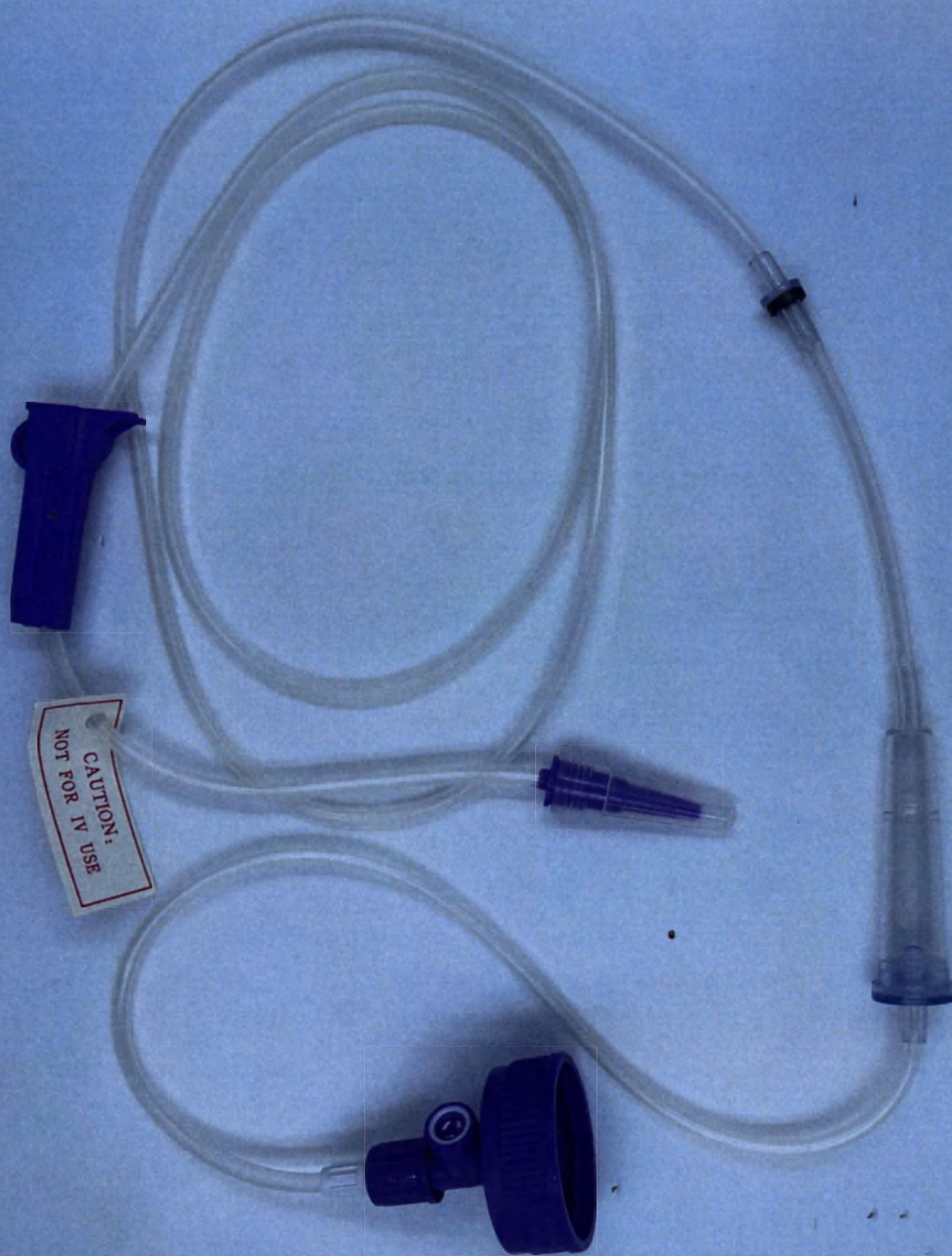


Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая по ТУ 32.50.50-013-38044224-2023, исполнений: Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая, тип D1, с помощью насоса, без мешка, в составе: Адаптер для бутылки с иглой – 1 шт; Удлинительная трубка – 1 шт; Капельная камера – 1 шт; Роликовый зажим – 1 шт; Силиконовая трубка для насоса – 1 шт; Соединитель трубки для насоса – 1 шт; Коннектор с колпачком – 1 шт, Бумажная карточка – 1 шт;


Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая по ТУ 32.50.50-013-38044224-2023, исполнений: Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая, тип D3, гравитационная, без мешка, в составе: Адаптер для бутылки с иглой – 1 шт; Удлинительная трубка – 1 шт; Капельная камера – 1 шт; Роликовый зажим – 1 шт; Коннектор с колпачком – 1 шт, Бумажная карточка – 1 шт;

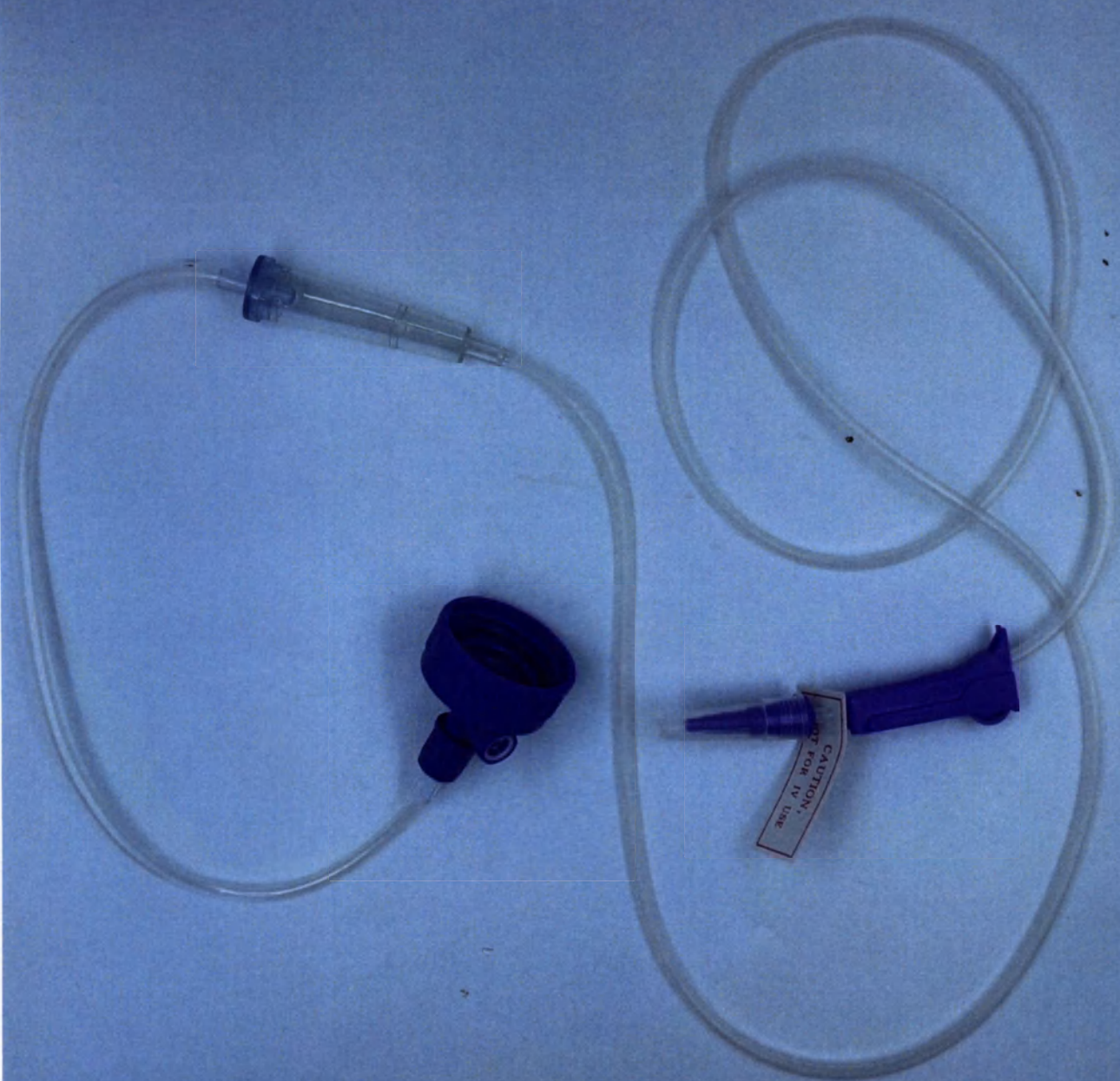

Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая по ТУ 32.50.50-013-38044224-2023, исполнений: Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая, тип E1, с помощью насоса, без мешка, в составе: Адаптер для мешков с иглой – 1 шт; Стопор для жидкости – 1 шт; Удлинительная трубка – 1 шт; Капельная камера – 1 шт; Роликовый зажим – 1 шт; Силиконовая трубка для насоса – 1 шт; Соединитель трубки для насоса – 1 шт; 3-ходовой порт (Y-коннектор) с коннектором ENFit (с колпачком и/или соединительным кольцом) – 1 шт; Коннектор с колпачком – 1 шт, Бумажная карточка – 1 шт;

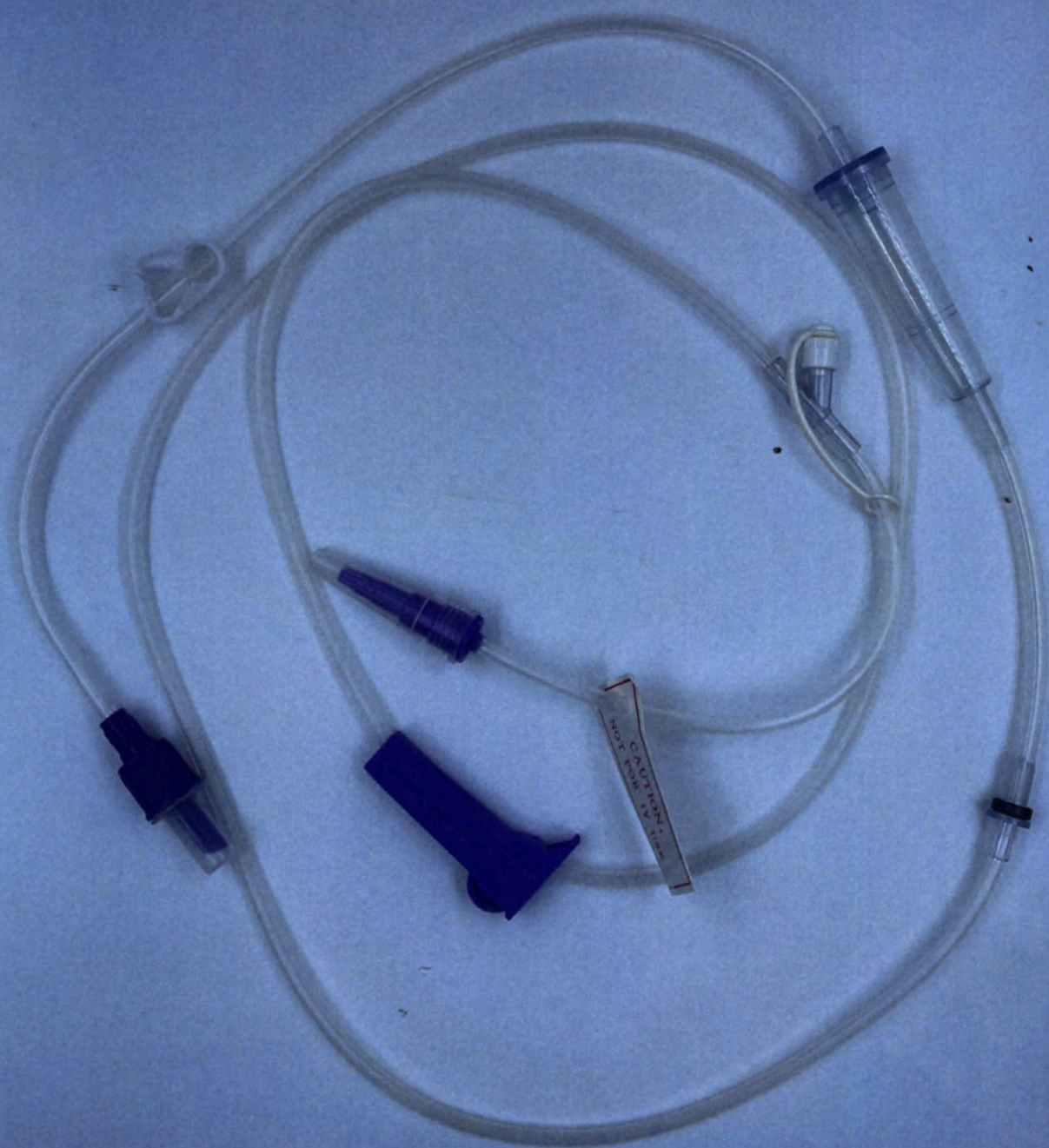

Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая по ТУ 32.50.50-013-38044224-2023, исполнений: Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая, тип ЕЗ, гравитационная, без мешка, в составе: Адаптер для мешков с иглой – 1 шт; Удлинительная трубка – 1 шт; Капельная камера – 1 шт; Роликовый зажим – 1 шт; Коннектор с колпачком – 1 шт, Бумажная карточка – 1 шт;

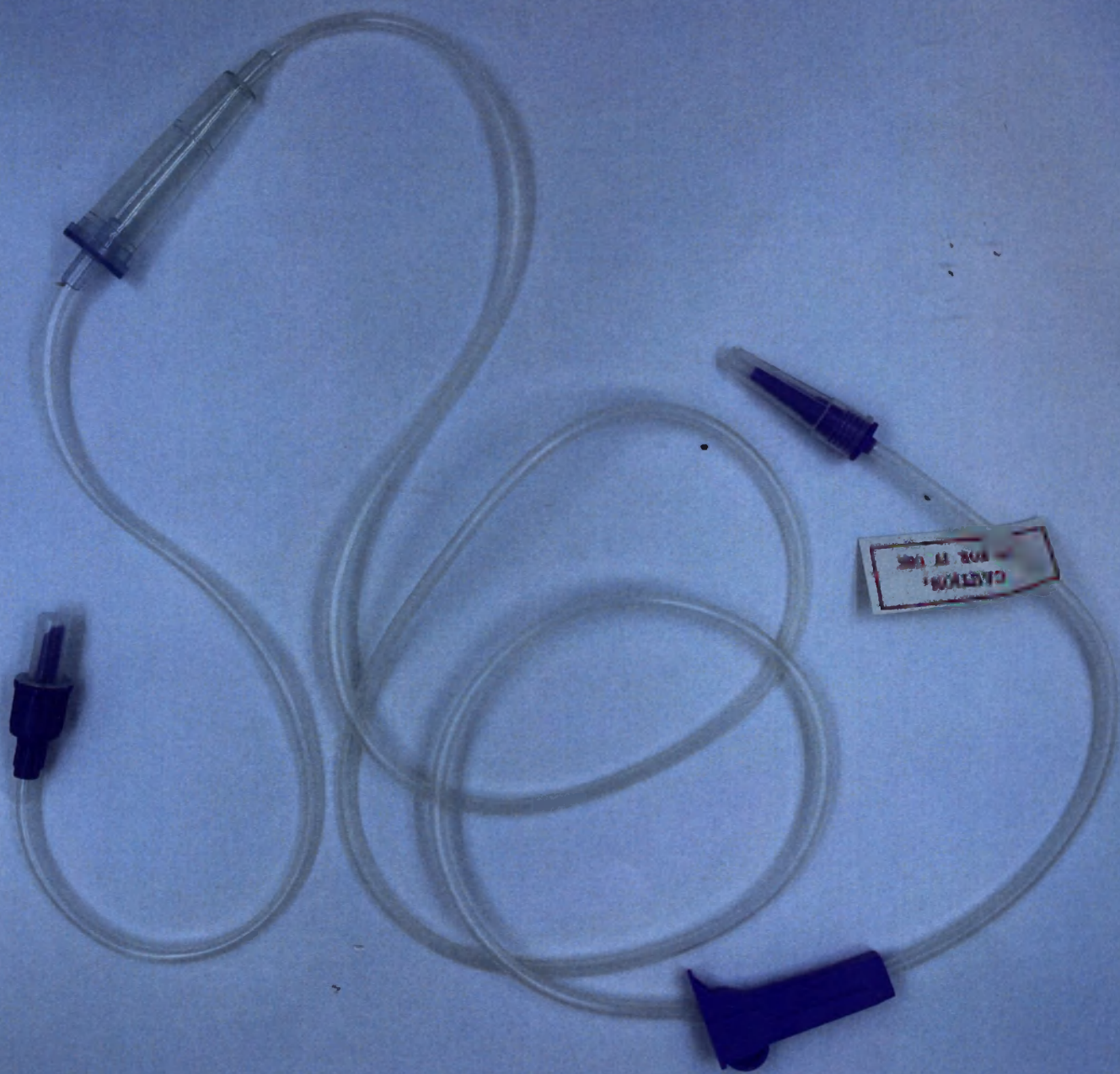

Прошито, пронумеровано и  
скреплено 11 листов

ООО «РиГ Групп Ко»

Генеральный директор

«11» нояб 2024 г. Аллахвердиев



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «РиГ Групп Ко»

Д.С. Аллахвердиев

«11» июня 2024г.

М.П.



## МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая  
по ТУ 32.50.50-013-38044224-2023

STATIM

A1

## Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая

ТУ 32.50.50-013-38044224-2023

**Исполнение:** Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая, тип A1, с помощью насоса, в составе: Мешок для питания с карманом и крышкой, объем 1200 мл — 1 шт., Удлинительная трубка — 1 шт., Капельная камера — 1 шт., Роликовый зажим — 1 шт., Силиконовая трубка для насоса — 1 шт., Соединитель трубки для насоса — 1 шт., 5-ходовой порт (Y-коннектор) с коннектором ENFit (с колпачком и/или соединительным кольцом) — 1 шт., Коннектор с колпачком — 1 шт., Бумажная картонка — 1 шт., Инструкция по применению, нанесенная на упаковку. **Назначение медицинского изделия:** предназначена для доставки питательных смесей при проведении зондовой энтеральной питательной поддержки во время интенсивной терапии в лечебно-профилактических учреждениях.

### ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Разорвать упаковку, чтобы достать изделие, затем закрыть роликовый зажим и стопор для жидкости (при наличии).

Открыть вводную крышку мешка для энтерального питания, добавить в мешок приготовленный питательный раствор, затем плотно закрыть крышку, встряхнуть мешок, чтобы раствор распределился равномерно, и повесить его на стойку для внутривенных вливаний.

2. Открыть роликовый зажим и стопор для жид-

кости (при наличии), снять колпачок с коннектора, заполнить всю удлинительную трубку для кормления питательным раствором, после чего убедиться, что в трубке нет пузырьков воздуха, затем закрыть роликовый зажим.

3. Для инфузии при помощи соответственного насоса.

Вставить силиконовую трубку для насоса в трубку фиксирующую канавку насоса для энтерального питания.

Подсоединить коннектор к нозогастральному, кишечному зонду и др.

Установить скорость потока насоса для энтерального питания в соответствии с требованиями, затем отрегулировать роликовым зажимом скорость потока, запустить насос для энтерального питания, начать кормление.

При промывке трубки или деаэрации снять колпачок Y-коннектора (при наличии). Промыть трубку или подать питательный раствор, затем сразу же плотно закрыть колпачок Y-коннектора

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Перед использованием проверить упаковку.
- Данный комплект предназначен только для энтерального питания. Не используйте его для других вариантов инфузии.
- Не для внутривенного введения!
- Только для одного пациента. Рекомендуется заменять изделие каждые 24 часа.
- Одноразового использования. Уничтожить после использования.

- Данное изделие стерилизовано оксидом этилена. Стерильно. Использовать до указанного срока годности.
- Дата изготовления, срок годности, тип и размер указаны на упаковке.
- Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с инструкцией по применению.
- Перед непосредственным использованием, а также при поставке в холодный период года

- (при минусовых температурах) для выравнивания температуры изделий с температурой помещения их надлежит выдержать в упаковке при температуре не ниже 25 °C и относительной влажности воздуха (65±5)% не менее 72 часов.
- Изделия пригодны для применения при температуре окружающего воздуха от минус 18 до плюс 50 °C и относительной влажности от 35 до 85% при плюс 25 °C!

Утилизация осуществляется в соответствии с СанПиН 21.3684-21 (по классу Б, эпидемиологически опасные отходы). При истечении срока годности и (или) при нарушении целостности упаковки системы подлежат утилизации по классу А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам). **Условия хранения:** хранить при температуре от плюс 5 до плюс 35 °C и относительной влажности не более 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, и должны быть защищены от загрязнения, прямого солнечного света и воздействия агрессивных сред.

#### Размер мешка для кормления

- ☐ 350 мл ☐ 500 мл ☐ 800 мл  
☐ 1000 мл ☒ 1200 мл ☐ 1500 мл

#### Тип инфузии:

- ☐ Питание под действием силы тяжести  
☒ Использование насоса для энтерального питания

REF 20231007  
LOT 07.10.2023  
06.10.2025



Адрес места производства: ООО «Риг Групп Ко», 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р. н. Виллозское г. п. тер Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв. л. д. 3 стр. 1  
Jiangxi Hawk Medical Supplies Co. Ltd., Torch Road, High tech park, Fengcheng City, Yichun City, 331100 Jiangxi Province, P. R. Китай

Рег. уд. № от  
ООО «Риг Групп Ко»,  
199406, г. Санкт-Петербург,  
ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50  
www.rgggroup-co.com



ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

STATIM

A3

## Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая

ТУ 32.50.50-013-38044224-2023

**Исполнение:** Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая, тип A3, гравитационная, в составе: Мешок для питания с карманом и крышкой, объем 1200 мл; Удлинительная трубка — 1 шт., Капельная камера — 1 шт., Роликовый зажим — 1 шт., Коннектор с колпачком — 1 шт., Бумажная картонка — 1 шт., Инструкция по применению, нанесенная на упаковку. **Назначение медицинского изделия:** предназначена для доставки питательных смесей при проведении зондовой энтеральной питательной поддержки во время интенсивной терапии в лечебно-профилактических учреждениях.

### ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Разорвать упаковку, чтобы достать изделие, затем закрыть роликовый зажим и стопор для жидкости (при наличии).

Открыть вводную крышку мешка для энтерального питания, добавить в мешок приготовленный питательный раствор, затем плотно закрыть крышку, встряхнуть мешок, чтобы раствор распределился равномерно.

и повесить его на стойку для внутривенных вливаний, и повесить его на стойку для внутривенных вливаний.

2. Открыть роликовый зажим и стопор для жидкости (при наличии), снять колпачок с коннектора, заполнить всю удлинительную трубку для кормления питательным раствором, после чего убедиться, что

в трубке нет пузырьков воздуха, затем закрыть роликовый зажим.

3. Для гравитационной инфузии:

Подсоединить коннектор к нозогастральному, кишечному зонду и др.  
Настроить роликовый зажим в соответствии с требуемой скоростью потока для подачи через зонд, начать кормление.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Перед использованием проверить упаковку.
- Данный комплект предназначен только для энтерального питания. Не используйте его для других вариантов инфузии.
- Не для внутривенного введения!
- Только для одного пациента. Рекомендуется заменять изделие каждые 24 часа.
- Одноразового использования. Уничтожить после использования.

- Данное изделие стерилизовано оксидом этилена. Стерильно. Использовать до указанного срока годности.
- Дата изготовления, срок годности, тип и размер указаны на упаковке.
- Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с инструкцией по применению.
- Перед непосредственным использованием, а также при поставке в холодный период года

- (при минусовых температурах) для выравнивания температуры изделий с температурой помещения их надлежит выдержать в упаковке при температуре не ниже 25 °C и относительной влажности воздуха (65±5)% не менее 72 часов.
- Изделия пригодны для применения при температуре окружающего воздуха от минус 18 до плюс 50 °C и относительной влажности от 35 до 85% при плюс 25 °C!

Утилизация осуществляется в соответствии с СанПиН 21.3684-21 (по классу Б, эпидемиологически опасные отходы). При истечении срока годности и (или) при нарушении целостности упаковки системы подлежат утилизации по классу А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам). **Условия хранения:** хранить при температуре от плюс 5 до плюс 35 °C и относительной влажности не более 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, и должны быть защищены от загрязнения, прямого солнечного света и воздействия агрессивных сред.

#### Размер мешка для кормления

- ☐ 350 мл ☐ 500 мл ☐ 800 мл  
☐ 1000 мл ☒ 1200 мл ☐ 1500 мл

#### Тип инфузии:

- ☒ Питание под действием силы тяжести  
☐ Использование насоса для энтерального питания

REF 20231007  
LOT 07.10.2023  
06.10.2025



Адрес места производства: ООО «Риг Групп Ко», 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р. н. Виллозское г. п. тер Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв. л. д. 3 стр. 1  
Jiangxi Hawk Medical Supplies Co. Ltd., Torch Road, High tech park, Fengcheng City, Yichun City, 331100 Jiangxi Province, P. R. Китай

Рег. уд. № от  
ООО «Риг Групп Ко»,  
199406, г. Санкт-Петербург,  
ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50  
www.rgggroup-co.com



ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

STATIM

A5

## Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая

ТУ 32.50.50-013-38044224-2023

**Исполнение:** Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая, тип A5, с помощью насоса, для двойного кормления, в составе: Мешок для питания с карманом и крышкой, объем 1200 мл – 2 шт.; Стопор для жидкости – 2 шт.; Удлинительная трубка – 1 шт.; Капельная камера – 1 шт.; Роликовый зажим – 1 шт.; Силиконовая трубка для насоса – 1 шт.; Соединитель трубки для насоса – 1 шт.; 3-ходовой порт (Y-коннектор) с коннектором ENFit (с колпачком и/или соединительным кольцом) – 1 шт.; Коннектор с колпачком – 1 шт.; Бумажная картонка – 1 шт.; Инструкция по применению, нанесенная на упаковку. **Назначение медицинского изделия:** предназначена для доставки питательных смесей при проведении зондовой энтеральной питательной поддержки во время интенсивной терапии в лечебно-профилактических учреждениях.

### ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Разорвать упаковку, чтобы достать изделие, затем закрыть роликовый зажим и стопор для жидкости (при наличии).

Открыть вводящую крышку мешка для энтерального питания, добавить в мешок приготовленный питательный раствор, затем плотно закрыть крышку, встряхнуть мешок, чтобы раствор распределился равномерно, и повесить его на стойку для внутривенных вливаний.

2. Открыть роликовый зажим и стопор для жид-

кости (при наличии), снять колпачок с коннектора, заполнить всю удлинительную трубку для кормления питательным раствором, после чего убедиться, что в трубке нет пузырьков воздуха, затем закрыть роликовый зажим.

3. Для инфузии при помощи соответственного насоса:

Вставить силиконовую трубку для насоса в трубочную фиксирующую канавку насоса для энтерального питания.

Подсоединить коннектор к назогастральному, кишечному зонду и др.

Установить скорость потока насоса для энтерального питания в соответствии с требованиями, затем отрегулировать роликовым зажимом скорость потока, запустить насос для энтерального питания, начать кормление.

При промывке трубки или дозировании снять колпачок Y-коннектора (при наличии). Промыть трубку или подать питательный раствор, затем сразу же плотно закрыть колпачок Y-коннектора.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Перед использованием проверить упаковку.
- Данный комплект предназначен только для энтерального питания. Не используйте его для других вариантов инфузии.
- Не для внутривенного введения!
- Только для одного пациента. Рекомендуется заменять изделие каждые 24 часа.
- Одноразового использования. Уничтожить после использования.

- Данное изделие стерилизовано оксидом этилена. Стерильно. Нетоксично. Использовать до указанного срока годности.
- Дата изготовления, срок годности, тип и размер указаны на упаковке.
- Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с инструкцией по применению.
- Перед непосредственным использованием, а также при поставке в холодный период года

- (при минусовых температурах) для выравнивания температуры изделия с температурой помещения их надлежит выдержать в упаковке при температуре не ниже 25 °C и относительной влажности воздуха (65±5)% не менее 72 часов.
- Изделия пригодны для применения при температуре окружающего воздуха от минус 18 до плюс 50 °C и относительной влажности от 35 до 85% при плюс 25 °C!

Утилизация осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 (по классу Б, эпидемиологически опасные отходы). При истечении срока годности и (или) при нарушении целостности упаковки системы подлежат утилизации по классу А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам). **Условия хранения:** хранить при температуре от плюс 5 до плюс 35 °C и относительной влажности не более 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, и должны быть защищены от загрязнений, прямого солнечного света и воздействия агрессивных сред.

#### Размер мешка для кормления

- ☐ 350 мл ☐ 500 мл ☐ 800 мл  
☐ 1000 мл ☒ 1200 мл ☐ 1500 мл

#### Тип инфузии:

- ☐ Питание под действием силы тяжести  
☒ Использование насоса для энтерального питания

REF  
LOT 20231007  
07.10.2023  
06.10.2025



Адрес места производства: ООО «Риг Групп Ко», 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р. н. Виллозское г. п. тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв. л. д. 3, стр. 1  
Jiangxi Hawk Medical Supplies Co. Ltd., Torch Road, High Tech park, Fengcheng City, Yichun City, 331100 Jiangxi Province, P. R. Китай

Рег. уд. № от  
ООО «Риг Групп Ко»,  
199406, г. Санкт-Петербург,  
ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50  
www.rgggroup-co.com

STERILE EO  
NON-TOXIC



ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

STATIM

A6

## Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая

ТУ 32.50.50-013-38044224-2023

**Исполнение:** Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая, тип A6, гравитационная, для двойного кормления, в составе: Мешок для питания с карманом и крышкой, объем 1200 мл – 2 шт.; Стопор для жидкости – 2 шт.; Удлинительная трубка – 1 шт.; Капельная камера – 1 шт.; Роликовый зажим – 1 шт.; 3-ходовой порт (Y-коннектор) с коннектором ENFit (с колпачком и/или соединительным кольцом) – 1 шт.; Коннектор с колпачком – 1 шт.; Бумажная картонка – 1 шт.; Инструкция по применению, нанесенная на упаковку. **Назначение медицинского изделия:** предназначена для доставки питательных смесей при проведении зондовой энтеральной питательной поддержки во время интенсивной терапии в лечебно-профилактических учреждениях.

### ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Разорвать упаковку, чтобы достать изделие, затем закрыть роликовый зажим и стопор для жидкости (при наличии).

Открыть вводящую крышку мешка для энтерального питания, добавить в мешок приготовленный питательный раствор, затем плотно закрыть крышку, встряхнуть мешок, чтобы раствор распределился равномерно, и повесить его на стойку для внутривенных вливаний.

2. Открыть роликовый зажим и стопор для жидкости (при наличии), снять колпачок с коннектора, заполнить всю удлинительную трубку для кормления питательным раствором, после чего убедиться, что в трубке нет пузырьков воздуха, затем закрыть роликовый зажим.

3. Для гравитационной инфузии:  
Подсоединить коннектор к назогастральному,

кишечному зонду и др.

Настроить роликовый зажим в соответствии с требуемой скоростью потока для подачи через зонд, начать кормление.

При промывке трубки или дозировании снять колпачок Y-коннектора (при наличии). Промыть трубку или подать питательный раствор, затем сразу же плотно закрыть колпачок Y-коннектора.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Перед использованием проверить упаковку.
- Данный комплект предназначен только для энтерального питания. Не используйте его для других вариантов инфузии.
- Не для внутривенного введения!
- Только для одного пациента. Рекомендуется заменять изделие каждые 24 часа.
- Одноразового использования. Уничтожить после использования.

- Данное изделие стерилизовано оксидом этилена. Стерильно. Нетоксично. Использовать до указанного срока годности.
- Дата изготовления, срок годности, тип и размер указаны на упаковке.
- Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с инструкцией по применению.
- Перед непосредственным использованием, а также при поставке в холодный период года

- (при минусовых температурах) для выравнивания температуры изделий с температурой помещения их надлежит выдержать в упаковке при температуре не ниже 25 °C и относительной влажности воздуха (65±5)% не менее 72 часов.
- Изделия пригодны для применения при температуре окружающего воздуха от минус 18 до плюс 50 °C и относительной влажности от 35 до 85% при плюс 25 °C!

Утилизация осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 (по классу Б, эпидемиологически опасные отходы). При истечении срока годности и (или) при нарушении целостности упаковки системы подлежат утилизации по классу А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам). **Условия хранения:** хранить при температуре от плюс 5 до плюс 35 °C и относительной влажности не более 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, и должны быть защищены от загрязнений, прямого солнечного света и воздействия агрессивных сред.

#### Размер мешка для кормления

- ☐ 350 мл ☐ 500 мл ☐ 800 мл  
☐ 1000 мл ☒ 1200 мл ☐ 1500 мл

#### Тип инфузии:

- ☒ Питание под действием силы тяжести  
☐ Использование насоса для энтерального питания

REF  
LOT 20231007  
07.10.2023  
06.10.2025



Адрес места производства: ООО «Риг Групп Ко», 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р. н. Виллозское г. п. тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв. л. д. 3, стр. 1  
Jiangxi Hawk Medical Supplies Co. Ltd., Torch Road, High Tech park, Fengcheng City, Yichun City, 331100 Jiangxi Province, P. R. Китай

Рег. уд. № от  
ООО «Риг Групп Ко»,  
199406, г. Санкт-Петербург,  
ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50  
www.rgggroup-co.com

STERILE EO  
NON-TOXIC



ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

# STATIM

## C1

### Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая ТУ 32.50.50-013-38044224-2023

**Исполнение:** Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая, тип C1, с помощью насоса, без мешка, в составе: Энтеральная игла с колпачком — 1 шт., Удлинительная трубка — 1 шт., Капельная камера — 1 шт., Роликовый зажим — 1 шт., Силиконовая трубка для насоса — 1 шт., Соединитель трубки для насоса — 1 шт., Коннектор с колпачком — 1 шт., Бумажная картонка — 1 шт., Инструкция по применению, нанесенная на упаковку. **Назначение медицинского изделия:** предназначена для доставки питательных смесей при проведении зондовой энтеральной питательной поддержки во время интенсивной терапии в лечебно-профилактических учреждениях.

#### ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Разорвать упаковку, чтобы достать изделие, затем закрыть роликовый зажим и стопор для жидкости (при наличии).  
Снять колпачок с энтеральной иглы, вставить энтеральную иглу в бутылочку/мешок для энтерального питания, в которой приготовлен питательный раствор.
2. Открыть роликовый зажим и стопор для жидкости (при наличии), снять колпачок с коннектора, заполнить всю удлинительную трубку для кормления питательным раствором, после чего убедиться, что в трубке нет пузырьков воздуха, затем закрыть роликовый зажим.
3. Для инфузии при помощи соответствующего насоса.  
Вставить силиконовую трубку для насоса

в трубчатую фиксирующую канавку насоса для энтерального питания.  
Подсоединить коннектор к назогастральному, кишечному зонду и др.  
Установить скорость потока насоса для энтерального питания в соответствии с требованиями, затем отрегулировать роликовым зажимом скорость потока, запустить насос для энтерального питания, начать кормление.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Перед использованием проверить упаковку.
- Данный комплект предназначен только для энтерального питания. Не используйте его для других вариантов инфузии.
- Не для внутривенного введения!
- Только для одного пациента. Рекомендуется заменять изделие каждые 24 часа.
- Одноразового использования. Уничтожить после использования.
- Данное изделие стерилизовано оксидом этилена. Стерильно. Нетоксично. Использовать до указанного срока годности.
- Дата изготовления, срок годности, тип и размер указаны на упаковке.
- Для получения дополнительной информации ознакомиться с инструкцией по применению.
- Перед непосредственным использованием, а также при поставке в холодный период года

(при минусовых температурах) для выравнивания температуры изделия с температурой помещения их надлежит выдержать в упаковке при температуре не ниже 25 °C и относительной влажности воздуха (65±5)% не менее 72 часов.
- Изделия пригодны для применения при температуре окружающего воздуха от минус 18 до плюс 50 °C и относительной влажности от 35 до 85% при плюс 25 °C!

Утилизация осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 (по классу Б, эпидемиологически опасные отходы). При истечении срока годности и (или) при нарушении целостности упаковки системы подлежат утилизации по классу А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам). **Условия хранения:** хранить при температуре от плюс 5 до плюс 35 °C и относительной влажности не более 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, и должны быть защищены от загрязнений, прямого солнечного света и воздействия агрессивных сред.

#### Размер мешка для кормления

- ☐ 350 мл ☐ 500 мл ☐ 800 мл  
☐ 1000 мл ☐ 1200 мл ☐ 1500 мл

#### Тип инфузии:

- ☐ Питание под действием силы тяжести  
☒ Использование насоса для энтерального питания

REF 20231007  
LOT 07.10.2023  
06.10.2025



Адрес места производства: ООО «Риг Групп Ко», 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п. тер Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв. п. д. 3, стр. 1  
Jiangxi Hawk Medical Supplies Co. Ltd., Torch Road, High tech park, Fengcheng City, Yichun City, 331100 Jiangxi Province, P.R. Китай

Рег. уд. № от  
ООО «Риг Групп Ко»,  
199406, г. Санкт-Петербург,  
ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50  
www.rggroup-co.com



ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

# STATIM

## C3

### Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая ТУ 32.50.50-013-38044224-2023

**Исполнение:** Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая, тип C3, гравитационная, без мешка, в составе: Энтеральная игла с колпачком — 1 шт., Удлинительная трубка — 1 шт., Капельная камера — 1 шт., Роликовый зажим — 1 шт., Коннектор с колпачком — 1 шт., Бумажная картонка — 1 шт., Инструкция по применению, нанесенная на упаковку. **Назначение медицинского изделия:** предназначена для доставки питательных смесей при проведении зондовой энтеральной питательной поддержки во время интенсивной терапии в лечебно-профилактических учреждениях.

#### ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Разорвать упаковку, чтобы достать изделие, затем закрыть роликовый зажим и стопор для жидкости (при наличии).  
Снять колпачок с энтеральной иглы, вставить энтеральную иглу в бутылочку/мешок для энтерального питания, в которой приготовлен питательный раствор.
2. Открыть роликовый зажим и стопор для жидкости (при наличии), снять колпачок с коннектора, заполнить всю удлинительную трубку для кормления питательным раствором, после чего убедиться, что в трубке нет пузырьков воздуха, затем закрыть роликовый зажим.
3. Для гравитационной инфузии.  
Подсоединить коннектор к назогастральному, кишечному зонду и др.  
Настроить роликовый зажим в соответствии с требуемой скоростью потока для подачи через зонд, начать кормление.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Перед использованием проверить упаковку.
- Данный комплект предназначен только для энтерального питания. Не используйте его для других вариантов инфузии.
- Не для внутривенного введения!
- Только для одного пациента. Рекомендуется заменять изделие каждые 24 часа.
- Одноразового использования. Уничтожить после использования.
- Данное изделие стерилизовано оксидом этилена. Стерильно. Нетоксично. Использовать до указанного срока годности.
- Дата изготовления, срок годности, тип и размер указаны на упаковке.
- Для получения дополнительной информации ознакомиться с инструкцией по применению.
- Перед непосредственным использованием, а также при поставке в холодный период года

(при минусовых температурах) для выравнивания температуры изделия с температурой помещения их надлежит выдержать в упаковке при температуре не ниже 25 °C и относительной влажности воздуха (65±5)% не менее 72 часов.
- Изделия пригодны для применения при температуре окружающего воздуха от минус 18 до плюс 50 °C и относительной влажности от 35 до 85% при плюс 25 °C!

Утилизация осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 (по классу Б, эпидемиологически опасные отходы). При истечении срока годности и (или) при нарушении целостности упаковки системы подлежат утилизации по классу А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам). **Условия хранения:** хранить при температуре от плюс 5 до плюс 35 °C и относительной влажности не более 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, и должны быть защищены от загрязнений, прямого солнечного света и воздействия агрессивных сред.

#### Размер мешка для кормления

- ☐ 350 мл ☐ 500 мл ☐ 800 мл  
☐ 1000 мл ☐ 1200 мл ☐ 1500 мл

#### Тип инфузии:

- ☒ Питание под действием силы тяжести  
☐ Использование насоса для энтерального питания

REF 20231007  
LOT 07.10.2023  
06.10.2025



Адрес места производства: ООО «Риг Групп Ко», 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п. тер Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв. п. д. 3, стр. 1  
Jiangxi Hawk Medical Supplies Co. Ltd., Torch Road, High tech park, Fengcheng City, Yichun City, 331100 Jiangxi Province, P.R. Китай

Рег. уд. № от  
ООО «Риг Групп Ко»,  
199406, г. Санкт-Петербург,  
ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50  
www.rggroup-co.com



ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

# STATIM

## D1

### Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая ТУ 32.50.50-013-38044224-2023

**Исполнение:** Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая, тип D1, с помощью насоса, без мешка, в составе: Адаптер для бутылки с иглой — 1 шт., Удлинительная трубка — 1 шт., Капельная камера — 1 шт., Роликовый зажим — 1 шт., Силиконовая трубка для насоса — 1 шт., Соединитель трубки для насоса — 1 шт., Коннектор с колпачком — 1 шт., Бумажная карточка — 1 шт., Инструкция по применению, нанесенная на упаковку. **Назначение медицинского изделия:** предназначена для доставки питательных смесей при проведении зондовой энтеральной питательной поддержки во время интенсивной терапии в лечебно-профилактических учреждениях.

#### ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Разорвать упаковку, чтобы достать изделие, затем закрыть роликовый зажим и стопор для жидкости (при наличии).  
Открыть крышку бутылки с питательным раствором, плотно закрыть адаптером для бутылки системы энтерального питания бутылку с питательным раствором.
2. Открыть роликовый зажим и стопор для жидкости (при наличии), снять колпачок с коннектора, заполнить всю удлинительную трубку для кормления питательным раствором, после чего убедиться, что в трубке нет пузырьков воздуха, затем закрыть роликовый зажим.
3. Для инфузии при помощи соответствующего насоса:  
Вставить силиконовую трубку для насоса в трубчатую фиксирующую канавку насоса для энтерального питания.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Перед использованием проверить упаковку.
- Данный комплект предназначен только для энтерального питания. Не используйте его для других вариантов инфузии.
- Не для внутривенного введения!
- Только для одного пациента. Рекомендуется заменять изделие каждые 24 часа.
- Одноразового использования. Уничтожить после использования.
- Данное изделие стерилизовано оксидом этилена. Стерильно. Нетоксично. Использовать до указанного срока годности.
- Дата изготовления, срок годности, тип и размер указаны на упаковке.
- Для получения дополнительной информации ознакомиться с инструкцией по применению.
- Перед непосредственным использованием, а также при поставке в холодный период года (при минусовых температурах) для выравнивания температуры изделий с температурой помещения их надлежит выдержать в упаковке при температуре не ниже 25 °C и относительной влажности воздуха (65±5%) не менее 72 часов.
- Изделия пригодны для применения при температуре окружающего воздуха от минус 18 до плюс 50 °C и относительной влажности от 35 до 85% при плюс 25 °C!

Утилизация осуществляется в соответствии с СанПиН 21.3684-21 (по классу Б, эпидемиологически опасные отходы). При истечении срока годности и (или) при нарушении целостности упаковки системы подлежат утилизации по классу А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам). **Условия хранения:** хранить при температуре от плюс 5 до плюс 35 °C и относительной влажности не более 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, и должны быть защищены от загрязнения, прямого солнечного света и воздействия агрессивных сред.

#### Размер мешка для кормления

- ☐ 350 мл ☐ 500 мл ☐ 800 мл  
☐ 1000 мл ☐ 1200 мл ☐ 1500 мл

#### Тип инфузии:

- ☐ Питание под действием силы тяжести  
☒ Использование насоса для энтерального питания

REF  
20231007  
LOT  
07.10.2023  
06.10.2025



Адрес места производства: ООО «Риг Групп Ко», 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р. н. Виллозское г. п. тер. Южная часть пр. зоны Горелова, 1-й кв. л. д. 3, стр. 1.  
Jiangxi Hawk Medical Supplies Co. Ltd., Torch Road, High tech park, Fengcheng City, Yichun City, 331100 Jiangxi Province, P. R. Китай

Пер. уд. № от  
ООО «Риг Групп Ко»,  
199406, г. Санкт-Петербург,  
ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50  
www.rggroup-co.com

STERILE EO  
NON-TOXIC



ENFit

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

# STATIM

## D3

### Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая ТУ 32.50.50-013-38044224-2023

**Исполнение:** Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая, тип D3, гравитационная, без мешка, в составе: Адаптер для бутылки с иглой — 1 шт., Удлинительная трубка — 1 шт., Капельная камера — 1 шт., Роликовый зажим — 1 шт., Коннектор с колпачком — 1 шт., Бумажная карточка — 1 шт., Инструкция по применению, нанесенная на упаковку. **Назначение медицинского изделия:** предназначена для доставки питательных смесей при проведении зондовой энтеральной питательной поддержки во время интенсивной терапии в лечебно-профилактических учреждениях.

#### ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Разорвать упаковку, чтобы достать изделие, затем закрыть роликовый зажим и стопор для жидкости (при наличии).  
Снять колпачок с энтеральной иглы, вставить энтеральную иглу в бутылочку/мешок для энтерального питания, в которой приготовлен питательный раствор.
2. Открыть роликовый зажим и стопор для жидкости (при наличии), снять колпачок с коннектора, заполнить всю удлинительную трубку для кормления питательным раствором, после чего убедиться, что в трубке нет пузырьков воздуха, затем закрыть роликовый зажим.
3. Для гравитационной инфузии:  
Подсоединить коннектор к назогастральному, кишечному зонду и др.  
Настроить роликовый зажим в соответствии с требуемой скоростью потока для подачи через зонд, начать кормление.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Перед использованием проверить упаковку.
- Данный комплект предназначен только для энтерального питания. Не используйте его для других вариантов инфузии.
- Не для внутривенного введения!
- Только для одного пациента. Рекомендуется заменять изделие каждые 24 часа.
- Одноразового использования. Уничтожить после использования.
- Данное изделие стерилизовано оксидом этилена. Стерильно. Нетоксично. Использовать до указанного срока годности.
- Дата изготовления, срок годности, тип и размер указаны на упаковке.
- Для получения дополнительной информации ознакомиться с инструкцией по применению.
- Перед непосредственным использованием, а также при поставке в холодный период года (при минусовых температурах) для выравнивания температуры изделий с температурой помещения их надлежит выдержать в упаковке при температуре не ниже 25 °C и относительной влажности воздуха (65±5%) не менее 72 часов.
- Изделия пригодны для применения при температуре окружающего воздуха от минус 18 до плюс 50 °C и относительной влажности от 35 до 85% при плюс 25 °C!

Утилизация осуществляется в соответствии с СанПиН 21.3684-21 (по классу Б, эпидемиологически опасные отходы). При истечении срока годности и (или) при нарушении целостности упаковки системы подлежат утилизации по классу А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам). **Условия хранения:** хранить при температуре от плюс 5 до плюс 35 °C и относительной влажности не более 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, и должны быть защищены от загрязнения, прямого солнечного света и воздействия агрессивных сред.

#### Размер мешка для кормления

- ☐ 350 мл ☐ 500 мл ☐ 800 мл  
☐ 1000 мл ☐ 1200 мл ☐ 1500 мл

#### Тип инфузии:

- ☒ Питание под действием силы тяжести  
☐ Использование насоса для энтерального питания

REF  
20231007  
LOT  
07.10.2023  
06.10.2025



Адрес места производства: ООО «Риг Групп Ко», 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р. н. Виллозское г. п. тер. Южная часть пр. зоны Горелова, 1-й кв. л. д. 3, стр. 1.  
Jiangxi Hawk Medical Supplies Co. Ltd., Torch Road, High tech park, Fengcheng City, Yichun City, 331100 Jiangxi Province, P. R. Китай

Пер. уд. № от  
ООО «Риг Групп Ко»,  
199406, г. Санкт-Петербург,  
ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50  
www.rggroup-co.com

STERILE EO  
NON-TOXIC



ENFit

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

# STATIM

E1

## Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая ТУ 32.50.50-013-38044224-2023

**Исполнение:** Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая, тип E1, с помощью насоса, без мешка, в составе: Адаптер для мешков с иглой — 1 шт; Стопор для жидкости — 1 шт; Удлинительная трубка — 1 шт; Капельная камера — 1 шт; Роликовый зажим — 1 шт; Силиконовая трубка для насоса — 1 шт; Соединительная трубка для насоса — 1 шт; 3-ходовой порт (Y-коннектор) с коннектором ENFit (с колпачком и/или соединительным кольцом) — 1 шт; Коннектор с колпачком — 1 шт; Бумажная картонка — 1 шт; Инструкция по применению, нанесенная на упаковку. **Назначение медицинского изделия:** предназначена для доставки питательных смесей при проведении зондовой энтеральной питательной поддержки во время интенсивной терапии в лечебно-профилактических учреждениях.

### ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Разорвать упаковку, чтобы достать изделие, затем закрыть роликовый зажим и стопор для жидкости (при наличии).  
Открыть крышку мешка с питательным раствором, плотно закрыть адаптером для мешка системы энтерального питания мешок с питательным раствором.
2. Открыть роликовый зажим и стопор для жидкости (при наличии), снять колпачок с коннектора, заполнить всю удлинительную трубку для кормления питательным раствором.
3. Для инфузии при помощи соответствующего насоса:  
Вставить силиконовую трубку для насоса в трубку-насадку фиксирующую канавку насоса для энтерального питания.  
Подсоединить коннектор к назогастральному, кишечному зонду и др.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Перед использованием проверить упаковку.
- Данный комплект предназначен только для энтерального питания. Не используйте его для других вариантов инфузии.
- Не для внутривенного введения!
- Только для одного пациента. Рекомендуется заменять изделие каждые 24 часа.
- Одноразового использования. Уничтожить после использования.
- Данное изделие стерилизовано оксидом этилена. Стерильно. Нетоксично. Использовать до указанного срока годности.
- Дата изготовления, срок годности, тип и размер указаны на упаковке.
- Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с инструкцией по применению.
- Перед непосредственным использованием, а также при поставке в холодный период года

Установить скорость потока насоса для энтерального питания в соответствии с требованиями, затем отрегулировать роликовым зажимом скорость потока, запустить насос для энтерального питания, начать кормление.  
При промывке трубки или дозировании снять колпачок Y-коннектора (при наличии).  
Промыть трубку или подать питательный раствор, затем сразу же плотно закрыть колпачок Y-коннектора.

(при минусовых температурах) для выравнивания температуры изделий с температурой помещения их надлежит выдержать в упаковке при температуре не ниже 25 °C и относительной влажности воздуха (65±5)% не менее 72 часов.  
• Изделия пригодны для применения при температуре окружающего воздуха от минус 18 до плюс 50 °C и относительной влажности от 35 до 85% при плюс 25 °C!

Утилизация осуществляется в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 (по классу Б, эпидемиологически опасные отходы). При истечении срока годности и (или) при нарушении целостности упаковки системы подлежат утилизации по классу А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам). **Условия хранения:** хранить при температуре от плюс 5 до плюс 35 °C и относительной влажности не более 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, и должны быть защищены от загрязнений, прямого солнечного света и воздействия агрессивных сред.

### Размер мешка для кормления

- ☐ 350 мл ☐ 500 мл ☐ 800 мл  
☐ 1000 мл ☐ 1200 мл ☐ 1500 мл

### Тип инфузии:

- ☐ Питание под действием силы тяжести  
☒ Использование насоса для энтерального питания

REF  
LOT 20231007  
07.10.2023  
06.10.2025



Адрес места производства: ООО «Риг Групп Ко», 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п. тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв. л. д. 3, стр. 1  
Jiangxi Hawk Medical Supplies Co. Ltd., Torch Road, High tech park, Fengcheng City, Yichun City, 331100 Jiangxi Province, P. R. Китай

Рег. уд. № от  
ООО «Риг Групп Ко»,  
199406, г. Санкт-Петербург,  
ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50  
www.rggroup-co.com



ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

# STATIM

E3

## Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая ТУ 32.50.50-013-38044224-2023

**Исполнение:** Система энтерального питания STATIM стерильная, одноразовая, тип E3, гравитационная, без мешка, в составе: Адаптер для мешков с иглой — 1 шт; Удлинительная трубка — 1 шт; Капельная камера — 1 шт; Роликовый зажим — 1 шт; Коннектор с колпачком — 1 шт; Бумажная картонка — 1 шт; Инструкция по применению, нанесенная на упаковку. **Назначение медицинского изделия:** предназначена для доставки питательных смесей при проведении зондовой энтеральной питательной поддержки во время интенсивной терапии в лечебно-профилактических учреждениях.

### ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Разорвать упаковку, чтобы достать изделие, затем закрыть роликовый зажим и стопор для жидкости (при наличии).  
Открыть крышку мешка с питательным раствором, плотно закрыть адаптером для мешка системы энтерального питания мешок с питательным раствором.
2. Открыть роликовый зажим и стопор для жидкости (при наличии), снять колпачок с коннектора, заполнить всю удлинительную трубку для кормления питательным раствором, после чего убедиться, что в трубке нет пузырьков воздуха, затем закрыть роликовый зажим.
3. Для гравитационной инфузии:  
Подсоединить коннектор к назогастральному, кишечному зонду и др.  
Настроить роликовый зажим в соответствии с требуемой скоростью потока для подачи через зонд, начать кормление.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Перед использованием проверить упаковку.
- Данный комплект предназначен только для энтерального питания. Не используйте его для других вариантов инфузии.
- Не для внутривенного введения!
- Только для одного пациента. Рекомендуется заменять изделие каждые 24 часа.
- Одноразового использования. Уничтожить после использования.
- Данное изделие стерилизовано оксидом этилена. Стерильно. Нетоксично. Использовать до указанного срока годности.
- Дата изготовления, срок годности, тип и размер указаны на упаковке.
- Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с инструкцией по применению.
- Перед непосредственным использованием, а также при поставке в холодный период года
- (при минусовых температурах) для выравнивания температуры изделий с температурой помещения их надлежит выдержать в упаковке при температуре не ниже 25 °C и относительной влажности воздуха (65±5)% не менее 72 часов.
- Изделия пригодны для применения при температуре окружающего воздуха от минус 18 до плюс 50 °C и относительной влажности от 35 до 85% при плюс 25 °C!

Утилизация осуществляется в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 (по классу Б, эпидемиологически опасные отходы). При истечении срока годности и (или) при нарушении целостности упаковки системы подлежат утилизации по классу А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам). **Условия хранения:** хранить при температуре от плюс 5 до плюс 35 °C и относительной влажности не более 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, и должны быть защищены от загрязнений, прямого солнечного света и воздействия агрессивных сред.

### Размер мешка для кормления

- ☐ 350 мл ☐ 500 мл ☐ 800 мл  
☐ 1000 мл ☐ 1200 мл ☐ 1500 мл

### Тип инфузии:

- ☒ Питание под действием силы тяжести  
☐ Использование насоса для энтерального питания

REF  
LOT 20231007  
07.10.2023  
06.10.2025



Адрес места производства: ООО «Риг Групп Ко», 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский м. р-н, Виллозское г. п. тер. Южная часть пр. зоны Горелово, 1-й кв. л. д. 3, стр. 1  
Jiangxi Hawk Medical Supplies Co. Ltd., Torch Road, High tech park, Fengcheng City, Yichun City, 331100 Jiangxi Province, P. R. Китай

Рег. уд. № от  
ООО «Риг Групп Ко»,  
199406, г. Санкт-Петербург,  
ул. Шевченко, д. 22, к. 1, кв. 50  
www.rggroup-co.com



ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Прошито, пронумеровано и  
скреплено 4 листов  
ООО «РиГ Групп Ко»  
Генеральный директор  
«                    » / Г.С.Аллахвердиев  
«                    » 2024 г.

