

Утверждаю

Управляющий-Индивидуальный предприниматель

ООО «УМА»

Бизянихин Л.С.



» августа 20 24 г.

Аппарат лазерный мультиплатформенный Sciton с принадлежностями

вариант исполнения:

Аппарат лазерный мультиплатформенный Sciton Joule (Joule Multi-Platform System)

производства Sciton, Inc («Сайтон, Инк.»), США

Фотографические изображения



Системная консоль с контрольной панелью и монитором жидкокристаллическим




Системная консоль с контрольной панелью и монитором жидкокристаллическим




Системная консоль с контрольной панелью и монитором жидкокристаллическим



Системная консоль с контрольной панелью и монитором жидкокристаллическим


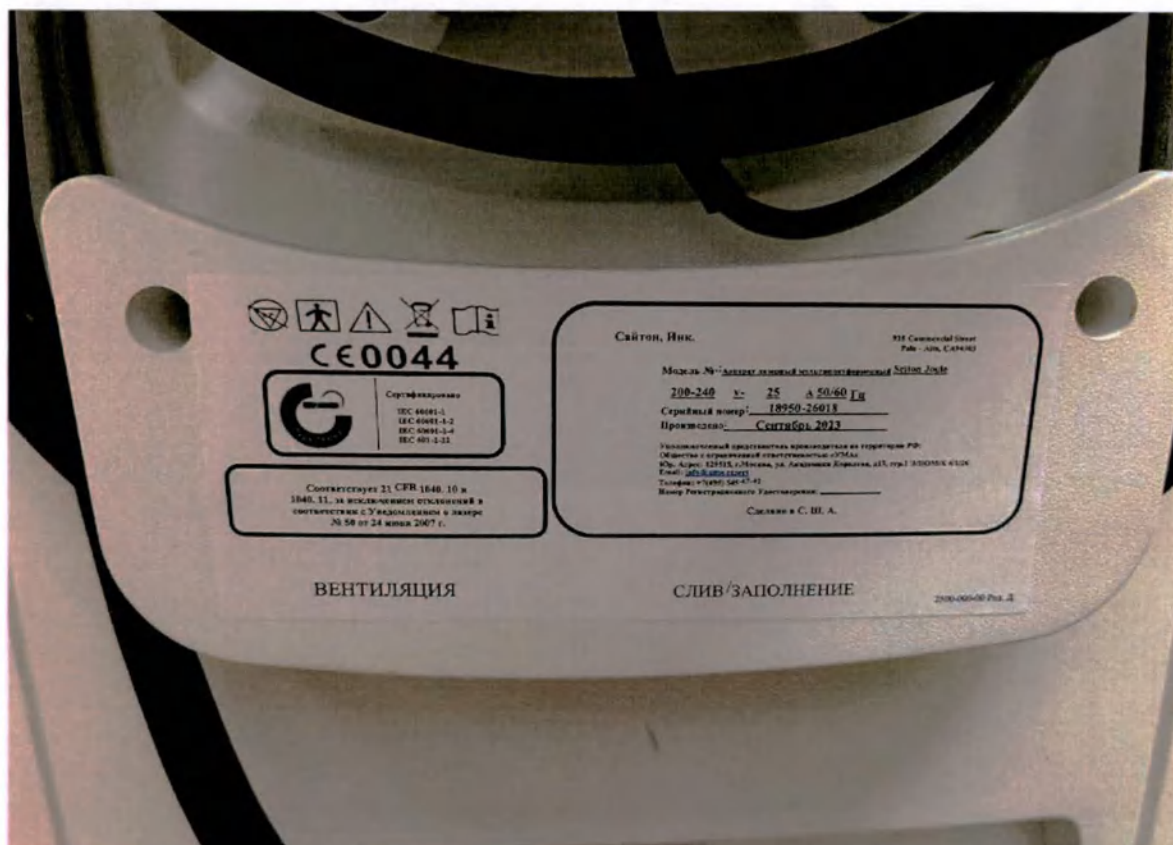


Системная консоль с контрольной панелью и монитором жидкокристаллическим

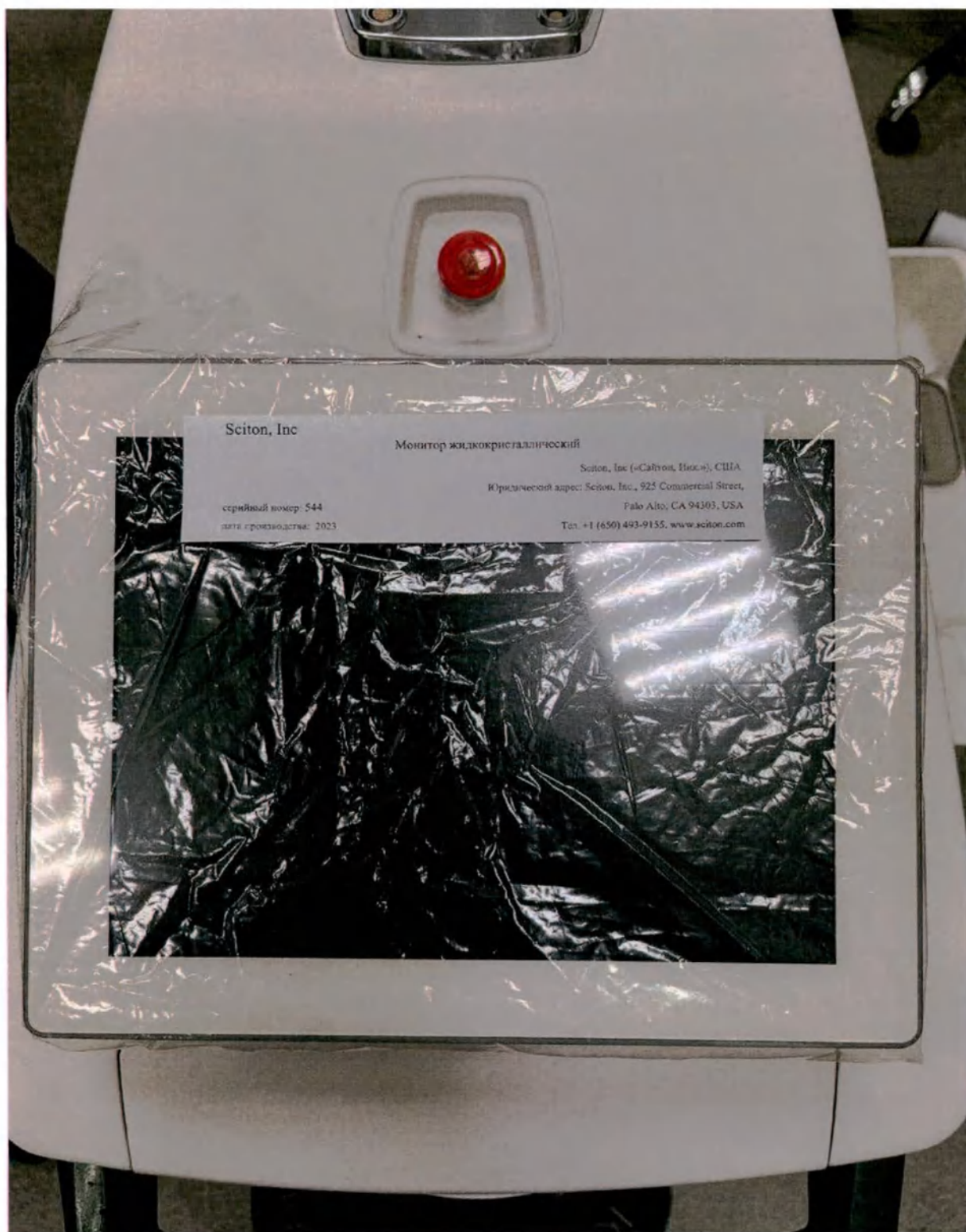


1. Монитор жидкокристаллический- 1 шт.

Экран, закреплен на аппарате. Можно вращать вокруг своей оси и наклонять вверх и вниз. Для мониторинга, управлением параметрами процедур

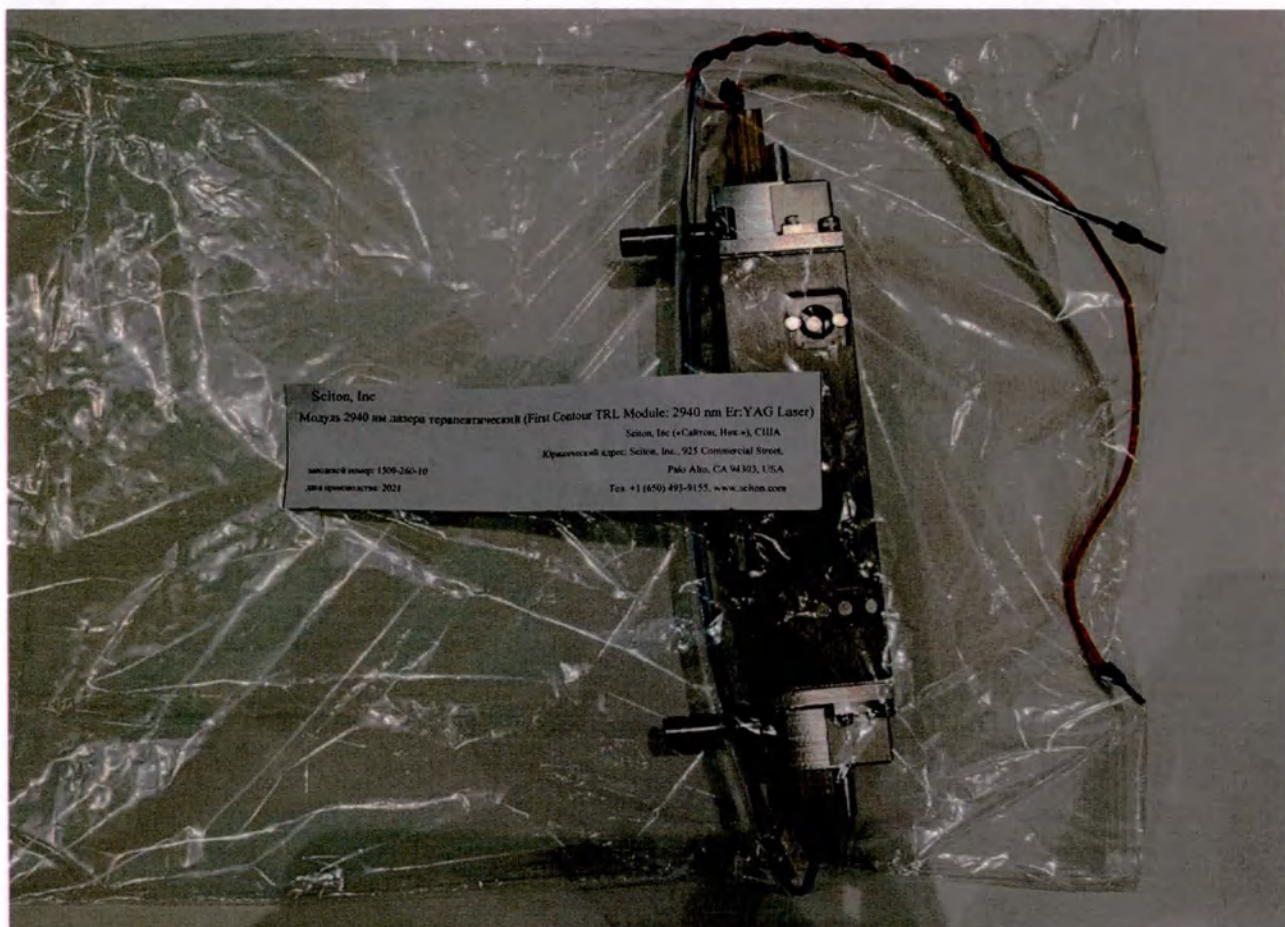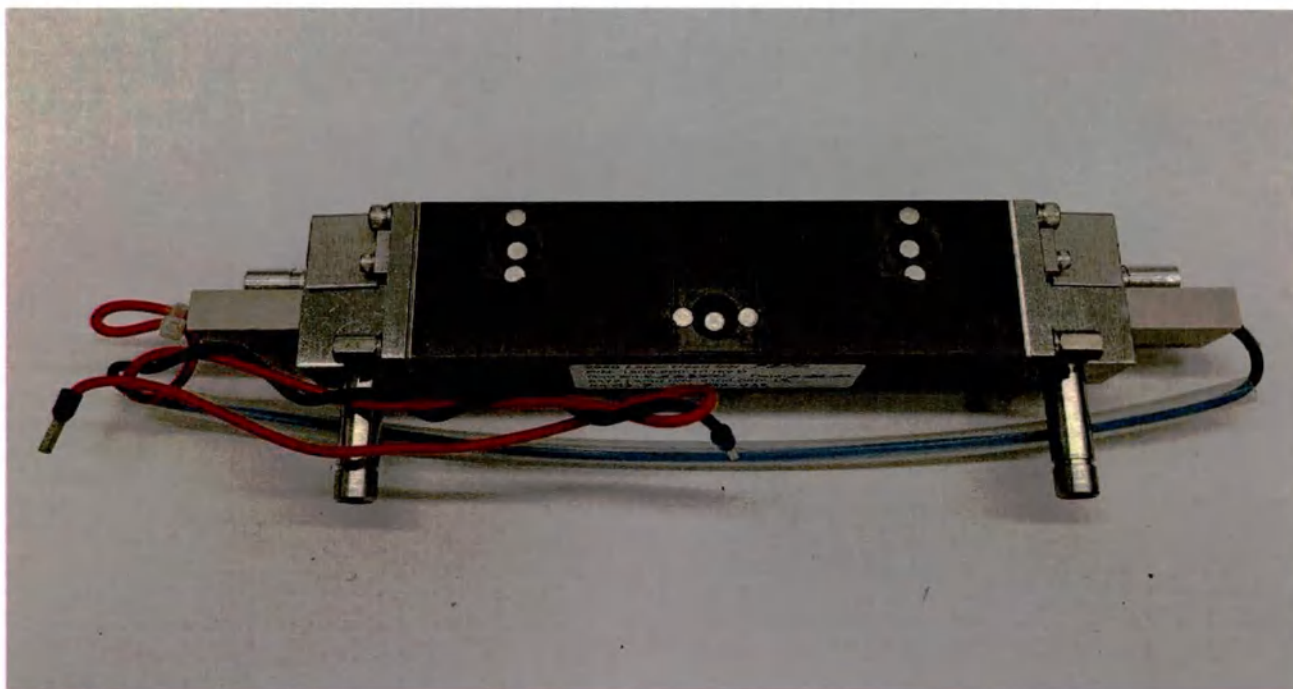


2. Модуль 2940 нм лазера терапевтический (First Contour TRL Module: 2940 nm Er:YAG Laser) -1 шт.;

Лазерный модуль, длины волны 2940 нм (Эрбий Er:YAG). Используется для лазерных шлифовок кожи путем выпаривания.

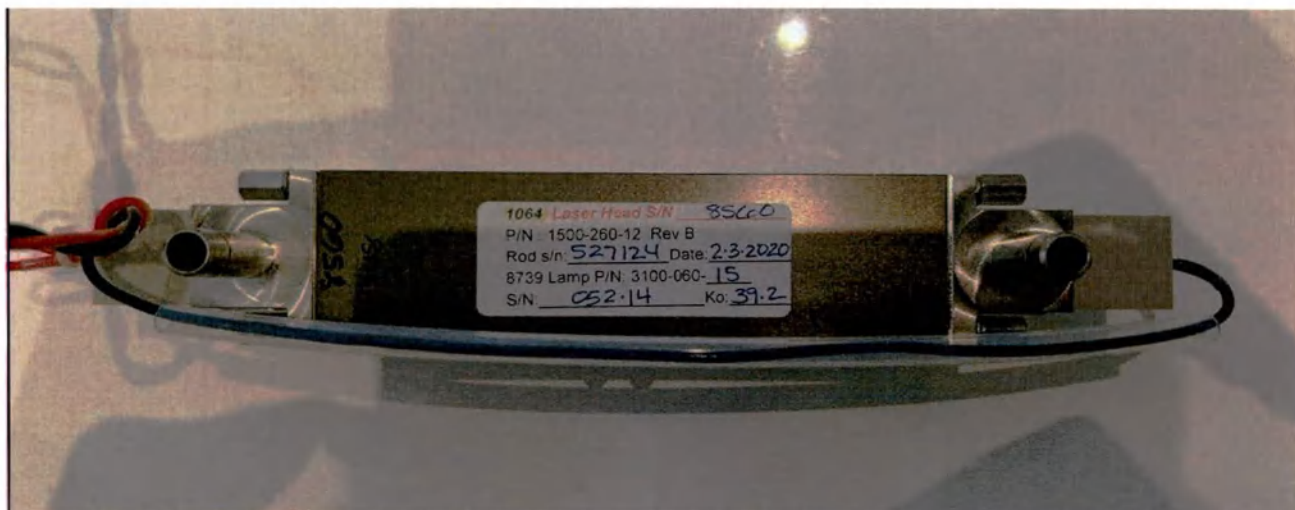

3. Модуль 1064 нм лазера терапевтический (Single 1064 nm Module: Nd:YAG Laser) – 1 шт.;


Лазерный модуль, длины волны 1064 нм (Неодим Nd.YAG). Используется для эпиляции, лечения сосудов и улучшения качества ногтей.

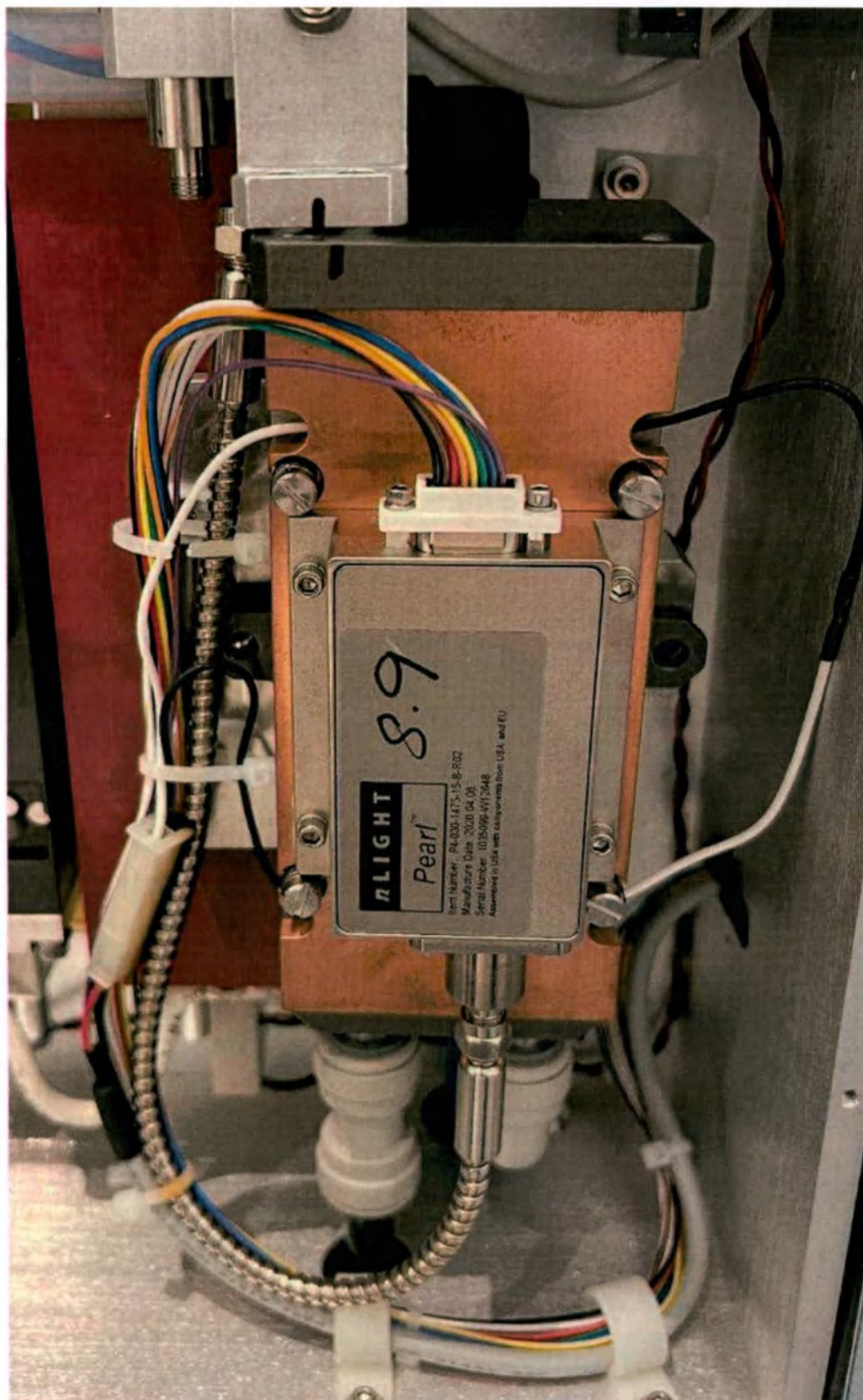


4. Модуль 1470 нм лазера терапевтический (High Power Diode Laser) – 1 шт.;
Лазерный модуль, длины волны 1470 нм (Диод). Необлятивный метод шлифовки кожи




5. Жесткий артикулятор - плечо для доставки интенсивного лазера (ARM – Broadband Articulated Delivery Arm) – 1 шт.;
Металлический артикулятор для доставки лазерного излучения

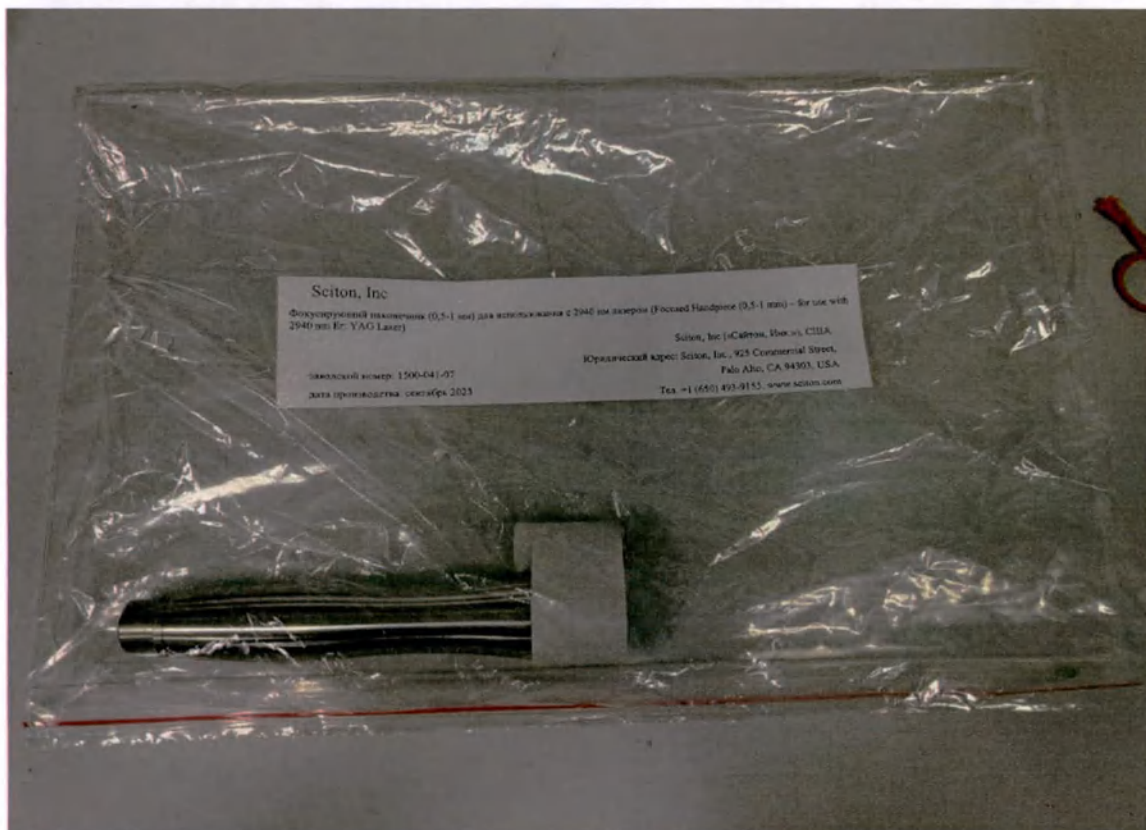

6. Фокусирующий наконечник (0,5-1 мм) для использования с 2940 нм лазером (Focused Handpiece (0,5-1 mm) – for use with 2940 nm Er: YAG Laser) – 1 шт.;
Наконечник, который надевается на жесткий артикулятор. Используется для лазерных надрезов, диаметром луча от 0,5 до 1 мм

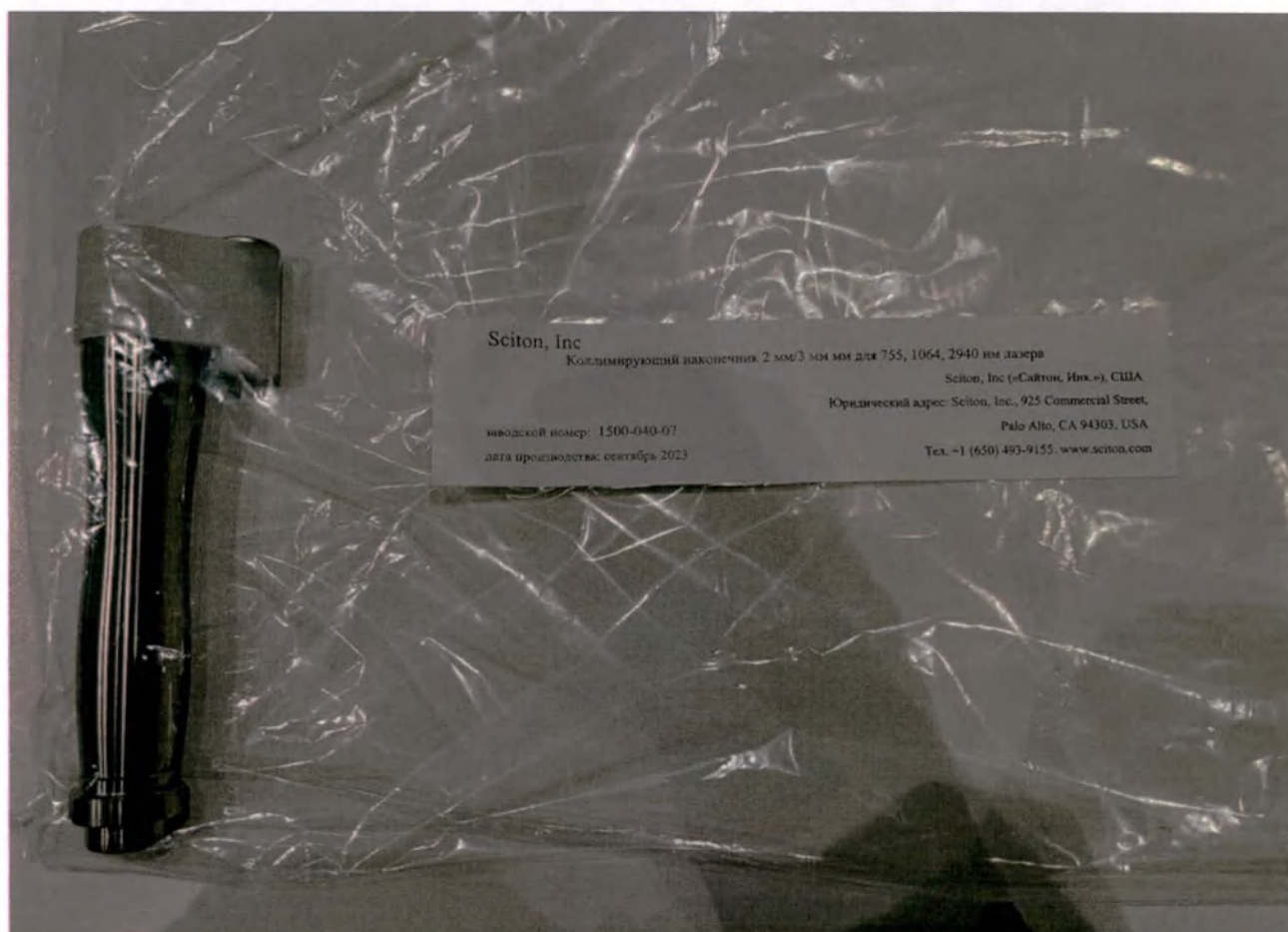

7. Коллимирующий наконечник 2 мм/3 мм для 755, 1064, 2940 нм лазера – 1 шт.; Наконечник, который надевается на жесткий артикулятор. Используется для лазерного пилинга, диаметром луча 2 мм с модулем 2940 нм


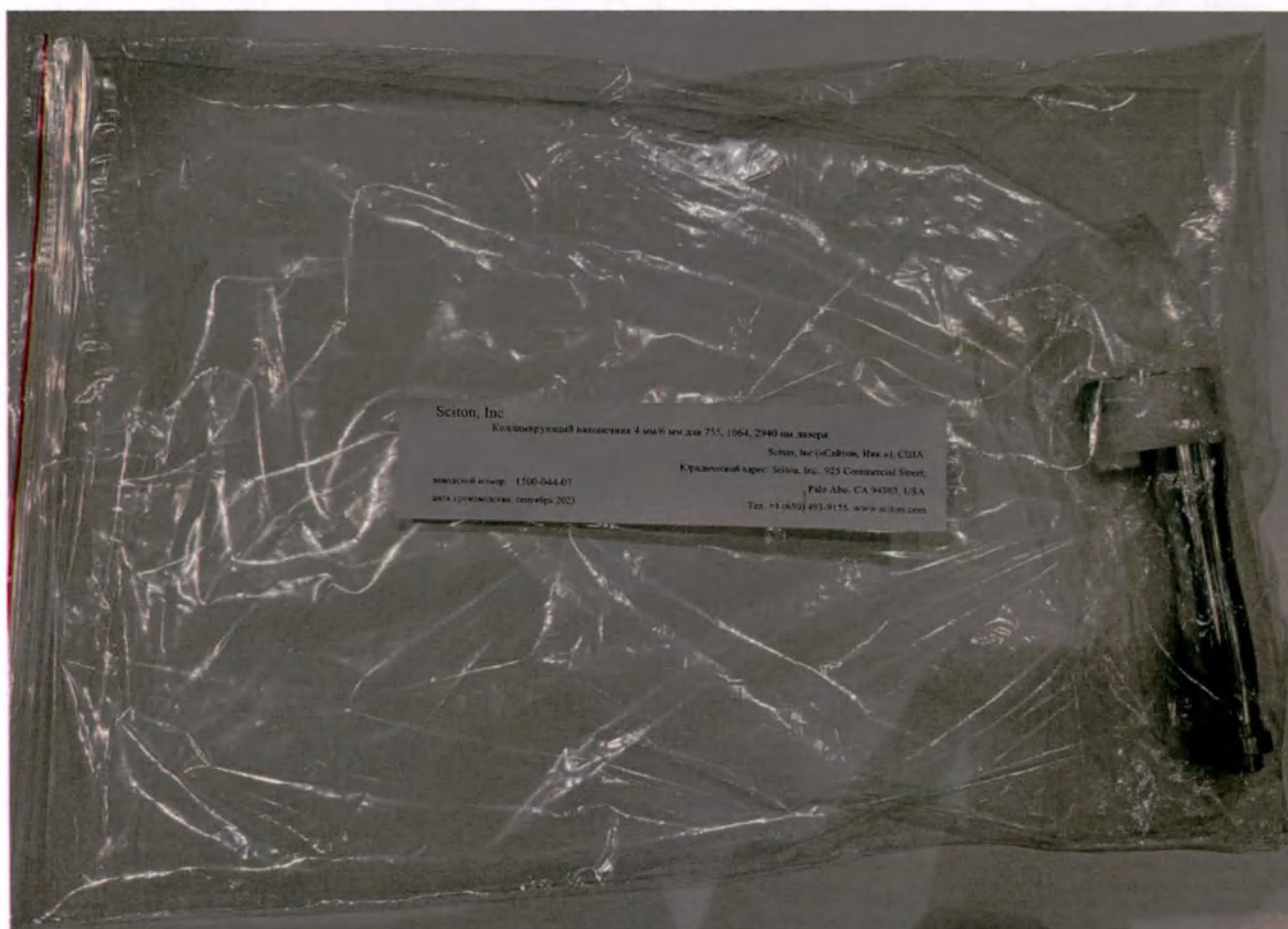


8. Коллимирующий наконечник 4 мм/6 мм для 755, 1064, 2940 нм лазера – 1 шт.;
Наконечник, который надевается на жесткий артикулятор. Используется для лечения
кожи, диаметром луча 3 мм с модулем 755 нм



9. Модуль широкополосного пульсирующего света терапевтический (BBL broadband pulsed light module) - 1 шт.;



Рукоятка со встроенной ксеноновой лампой. Используется для омоложения кожи путем воздействия на нее пульсирующим светом.

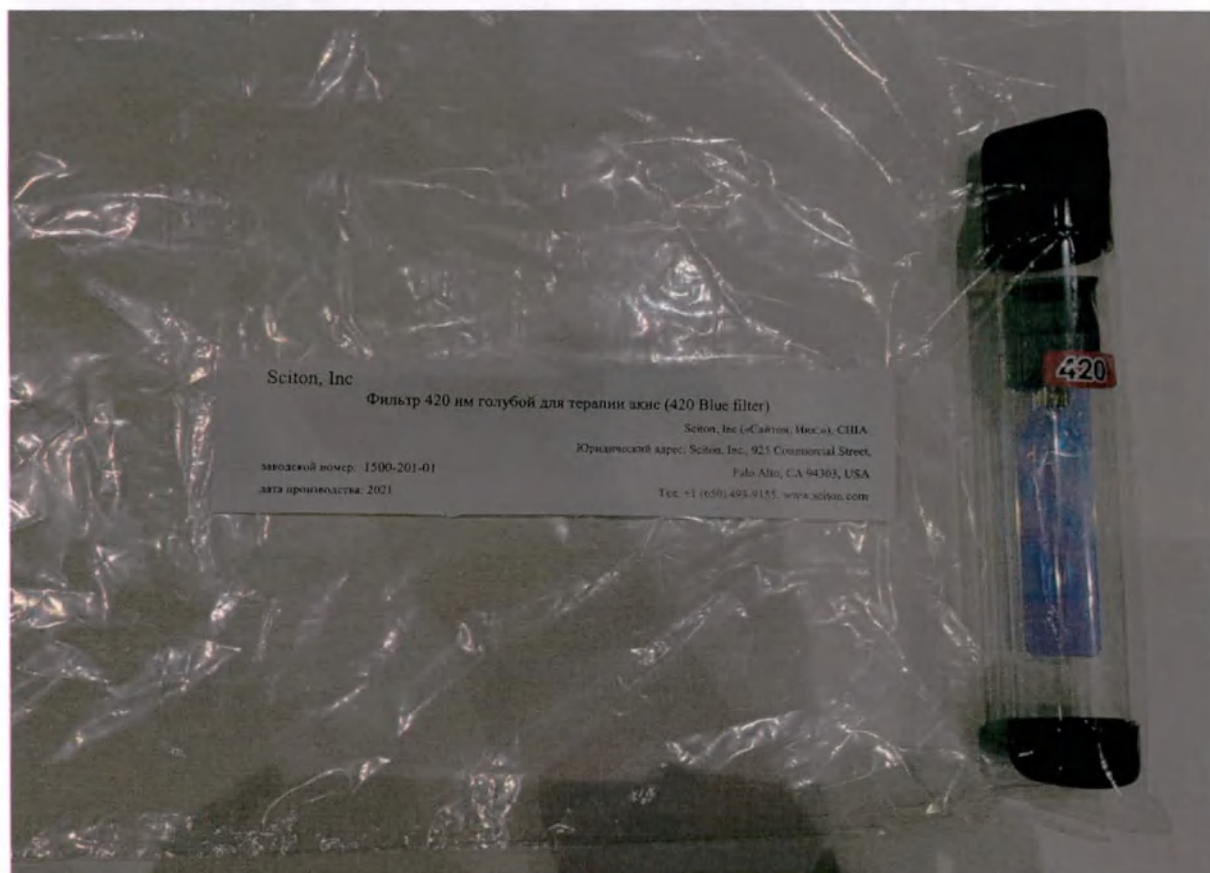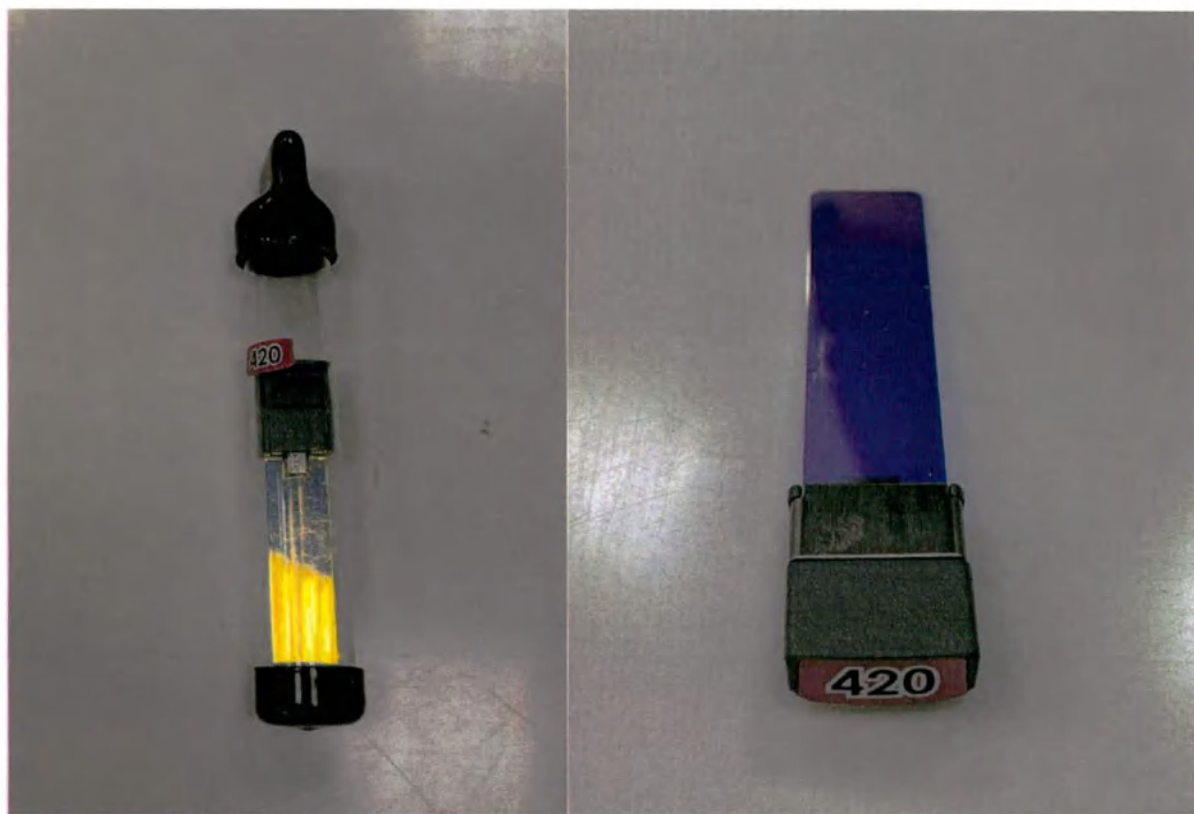


10. Фильтр 420 нм голубой для терапии акне (420 Blue filter) – 1 шт.;
Световой фильтр из сапфирового стекла. Отсекает световой спектр вокруг длины волны 420 нм. Используется для терапии акне





11. Фильтр 515 нм для коррекции кожи (515 skin rejuvenation option) – 1 шт.;
Световой фильтр из сапфирового стекла. Отсекает световой спектр вокруг длины волны 515 нм. Используется для коррекции кожи

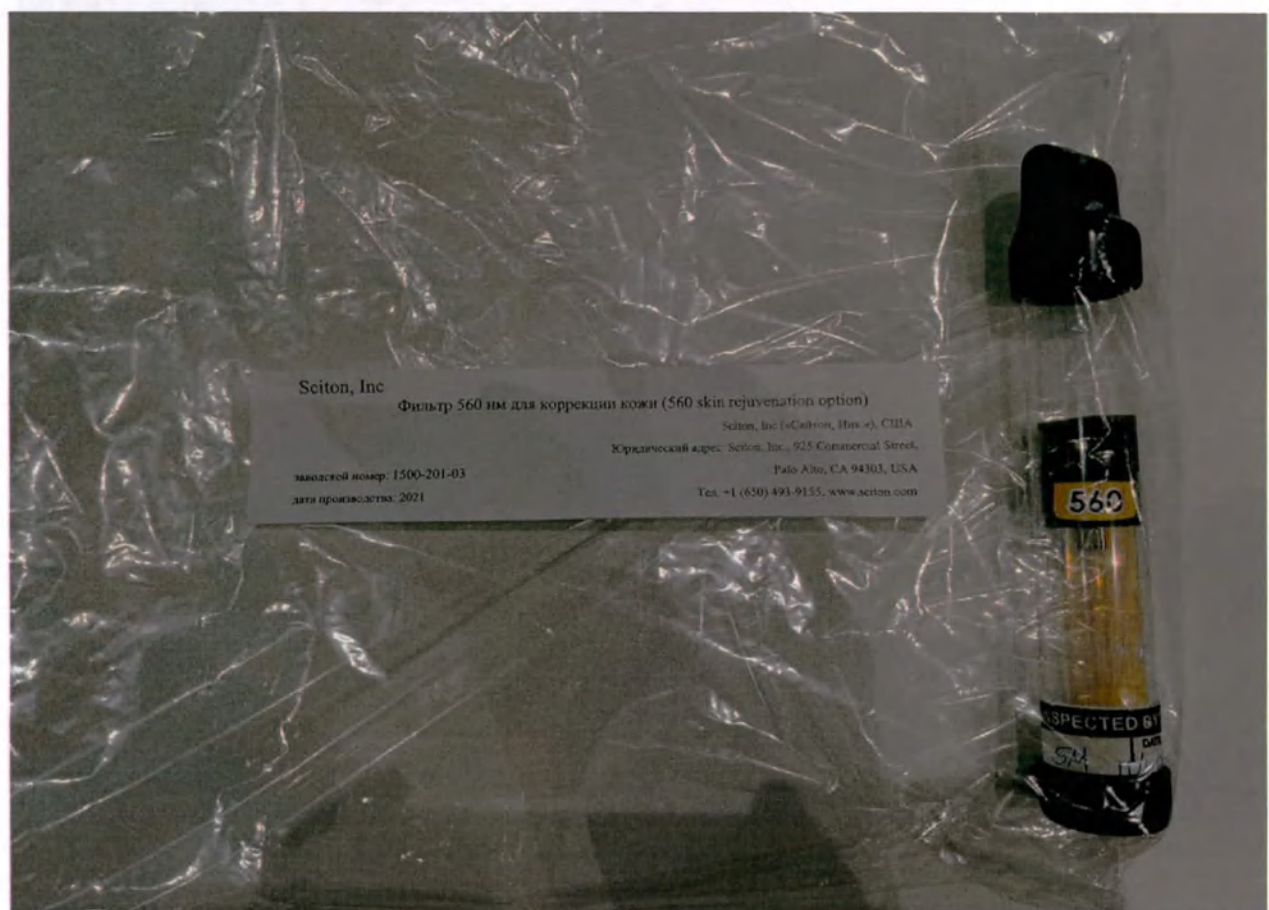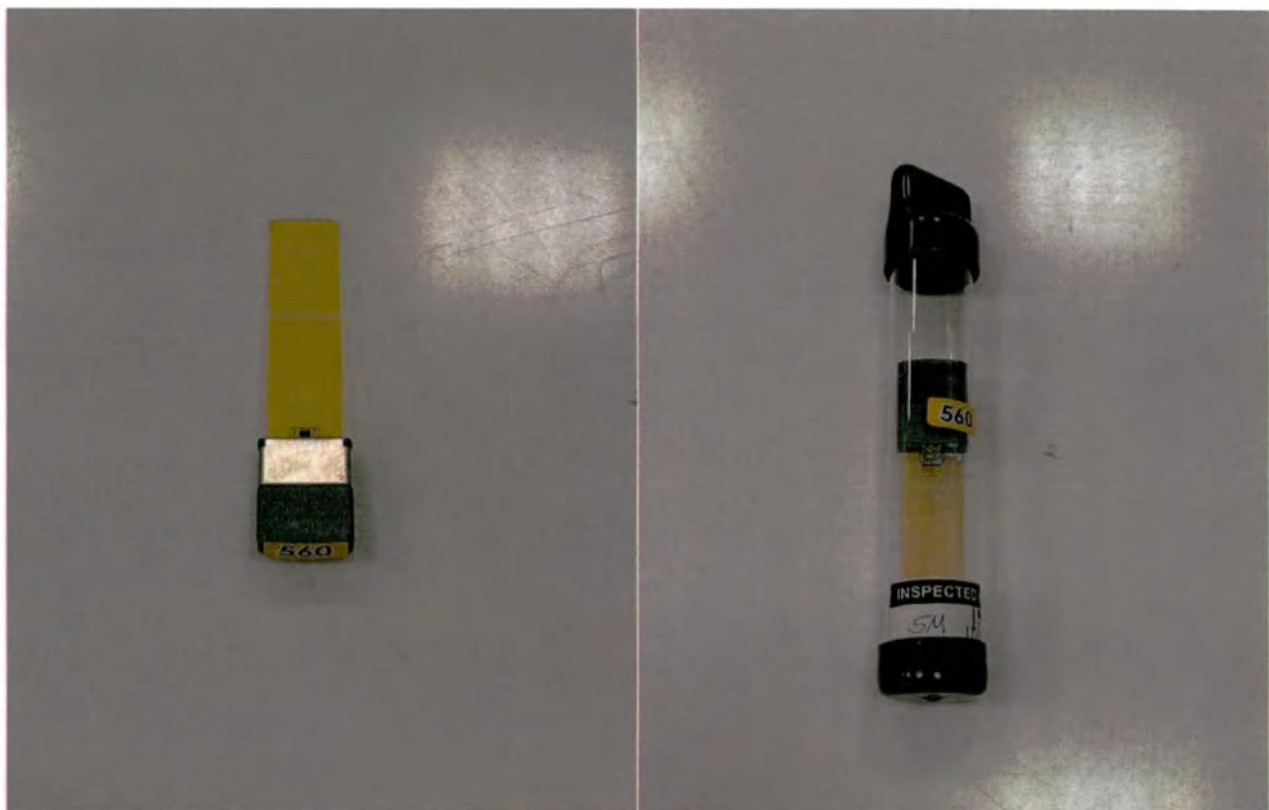



12. Фильтр 560 нм для коррекции кожи (560 skin rejuvenation option) -1 шт.;
 Световой фильтр из сапфирового стекла. Отсекает световой спектр вокруг длины волны 560 нм. Используется для коррекции кожи

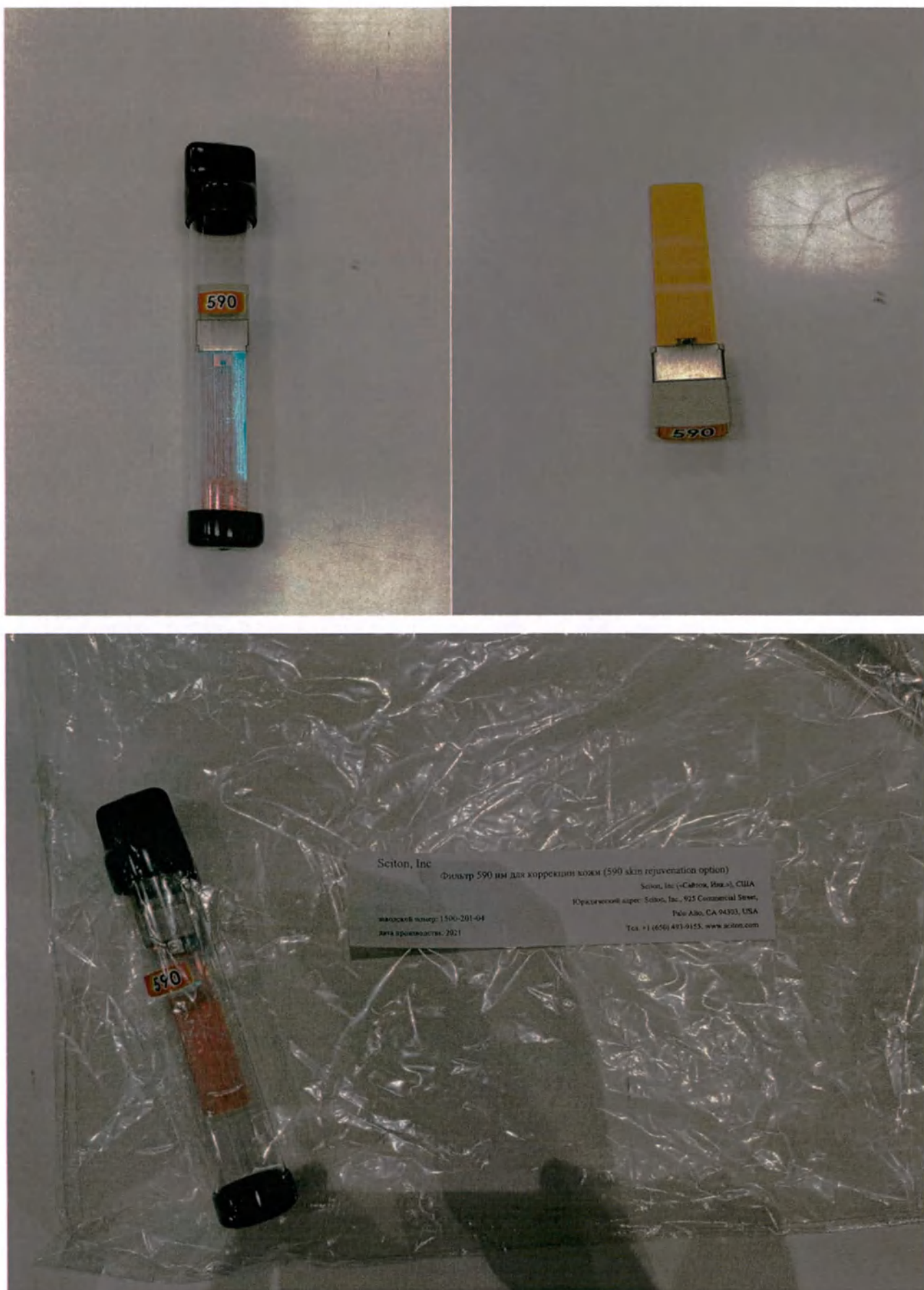


13. Фильтр 590 нм для коррекции кожи (590 skin rejuvenation option) - 1 шт.;
 Световой фильтр из сапфирового стекла. Отсекает световой спектр вокруг длины волны
 590 нм. Используется для коррекции кожи

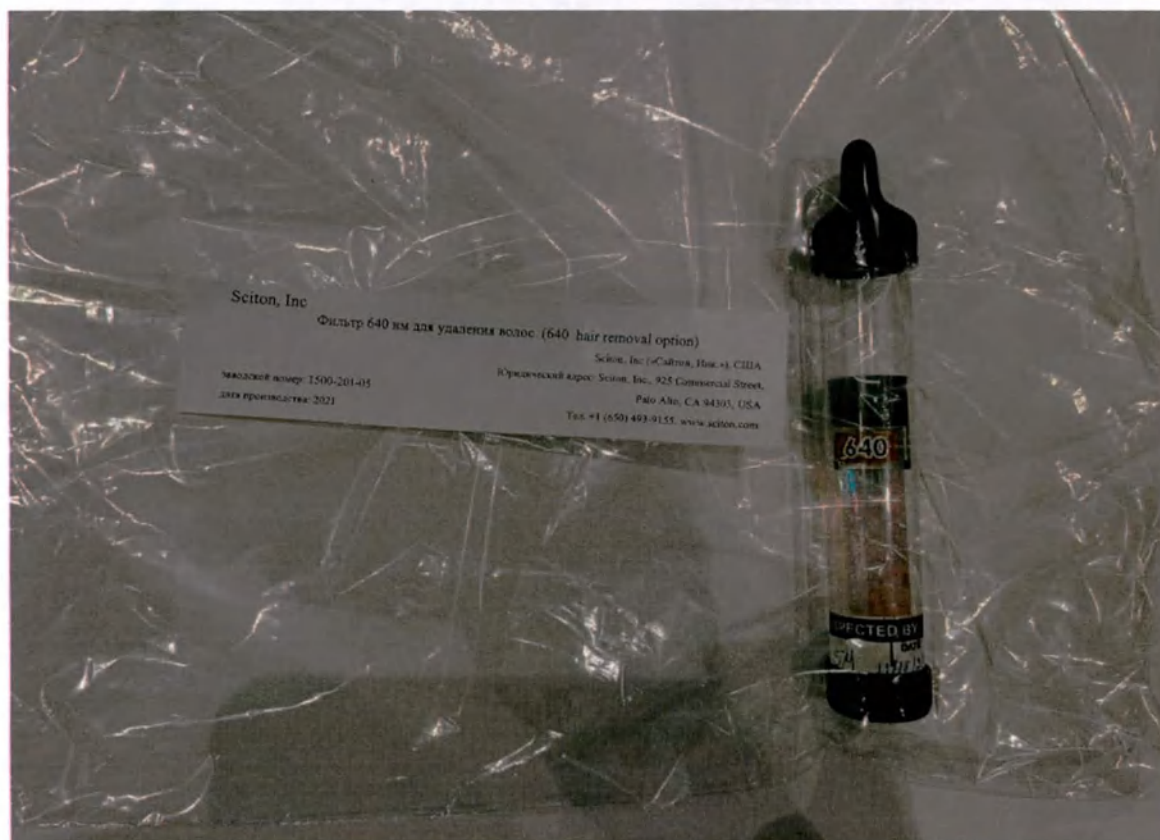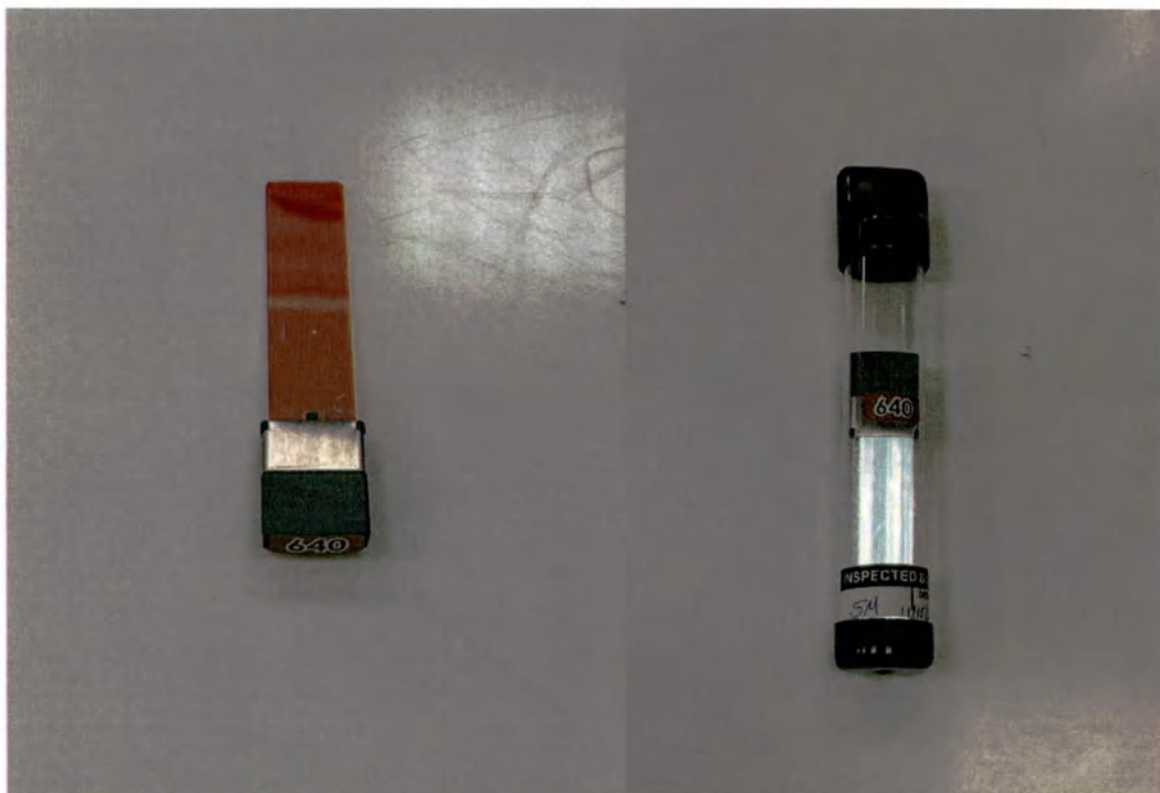



14. Фильтр 640 нм для удаления волос (640 hair removal option) -1 шт.;
 Световой фильтр из сапфирового стекла. Отсекает световой спектр вокруг длины волны 640 нм. Используется для удаления волос

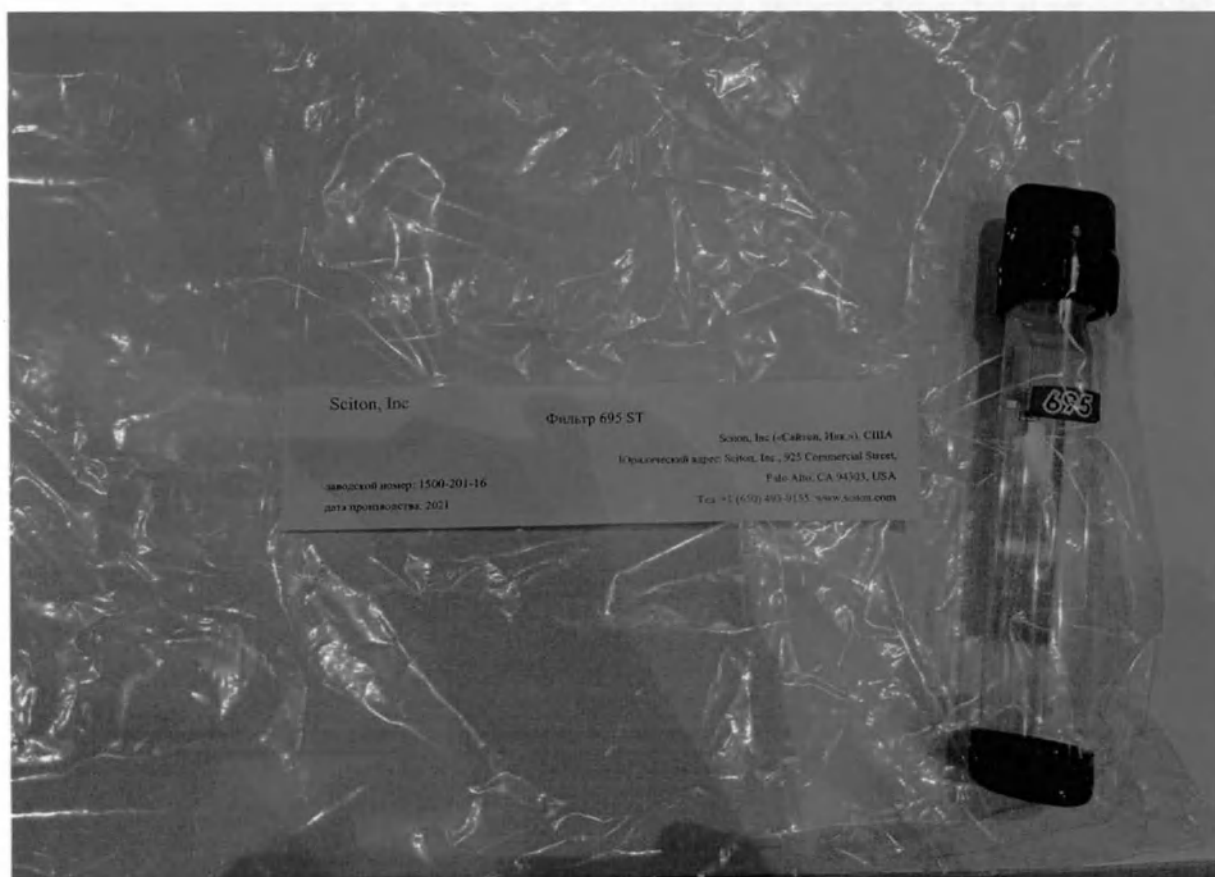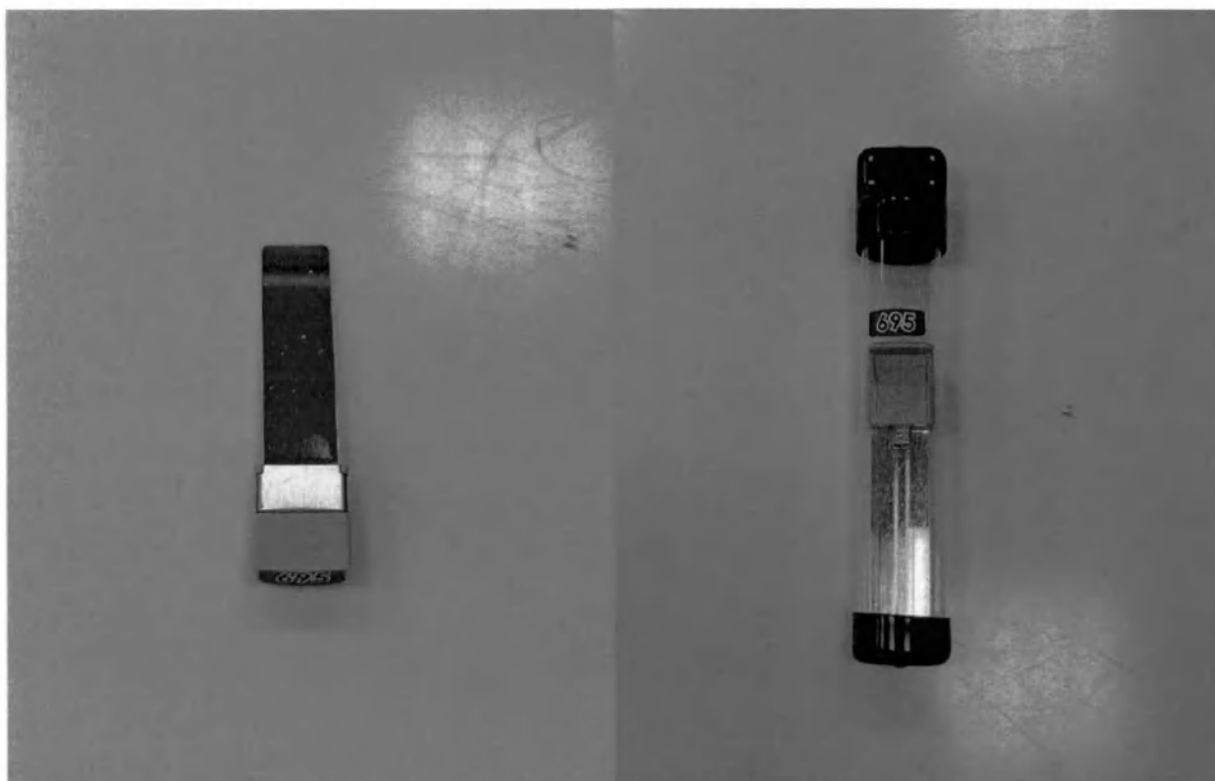



15. Фильтр 695 нм для удаления волос (695 hair removal option) – 1 шт.;
 Световой фильтр из сапфирового стекла. Отсекает световой спектр вокруг длины волны 695 нм. Используется для удаления волос

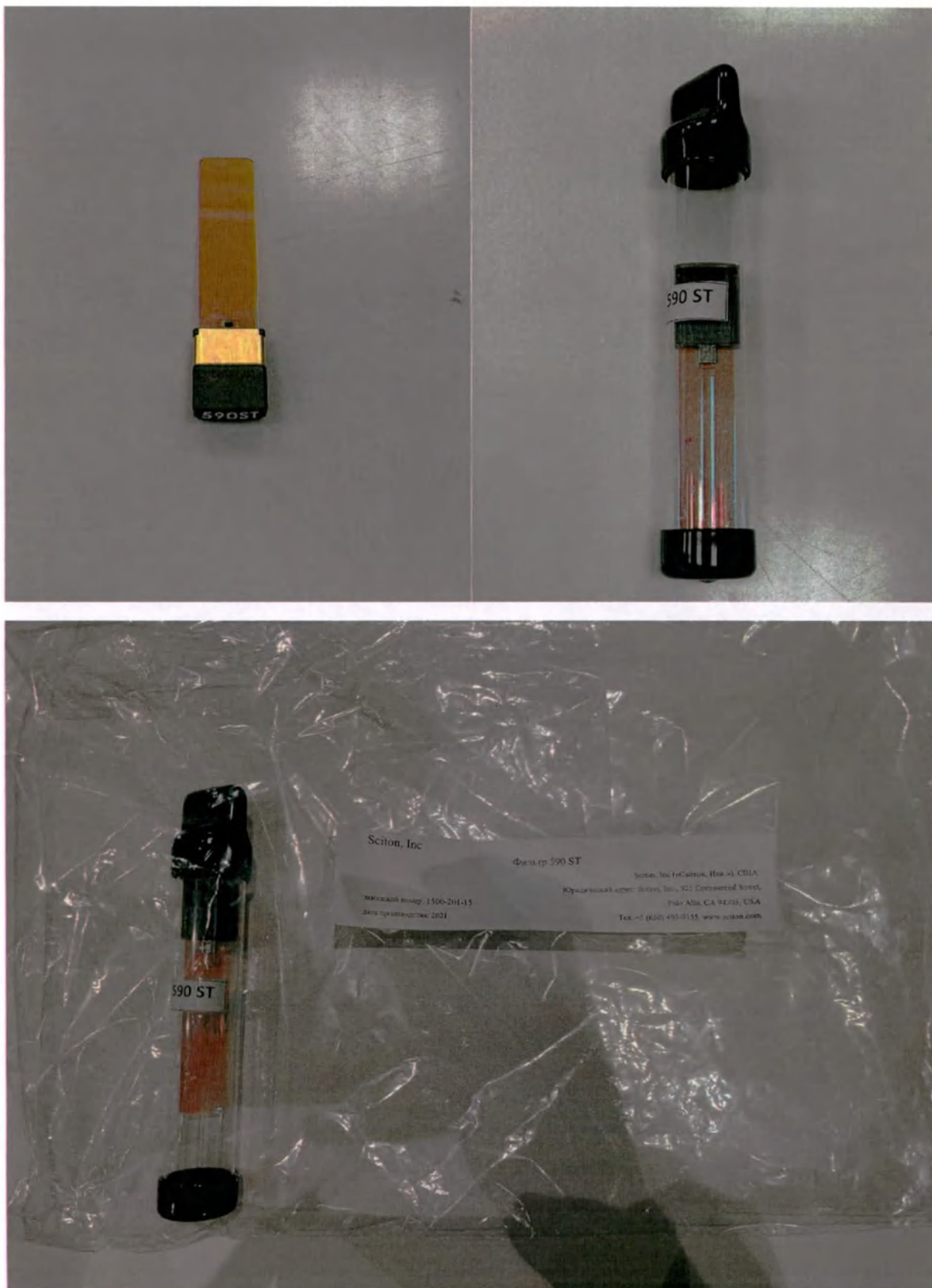


16. Фильтр 590 ST – 1шт.;
Световой фильтр из сапфирового стекла. Отсекает световой спектр вокруг длины волны 590 нм. Используется для термолифтинга

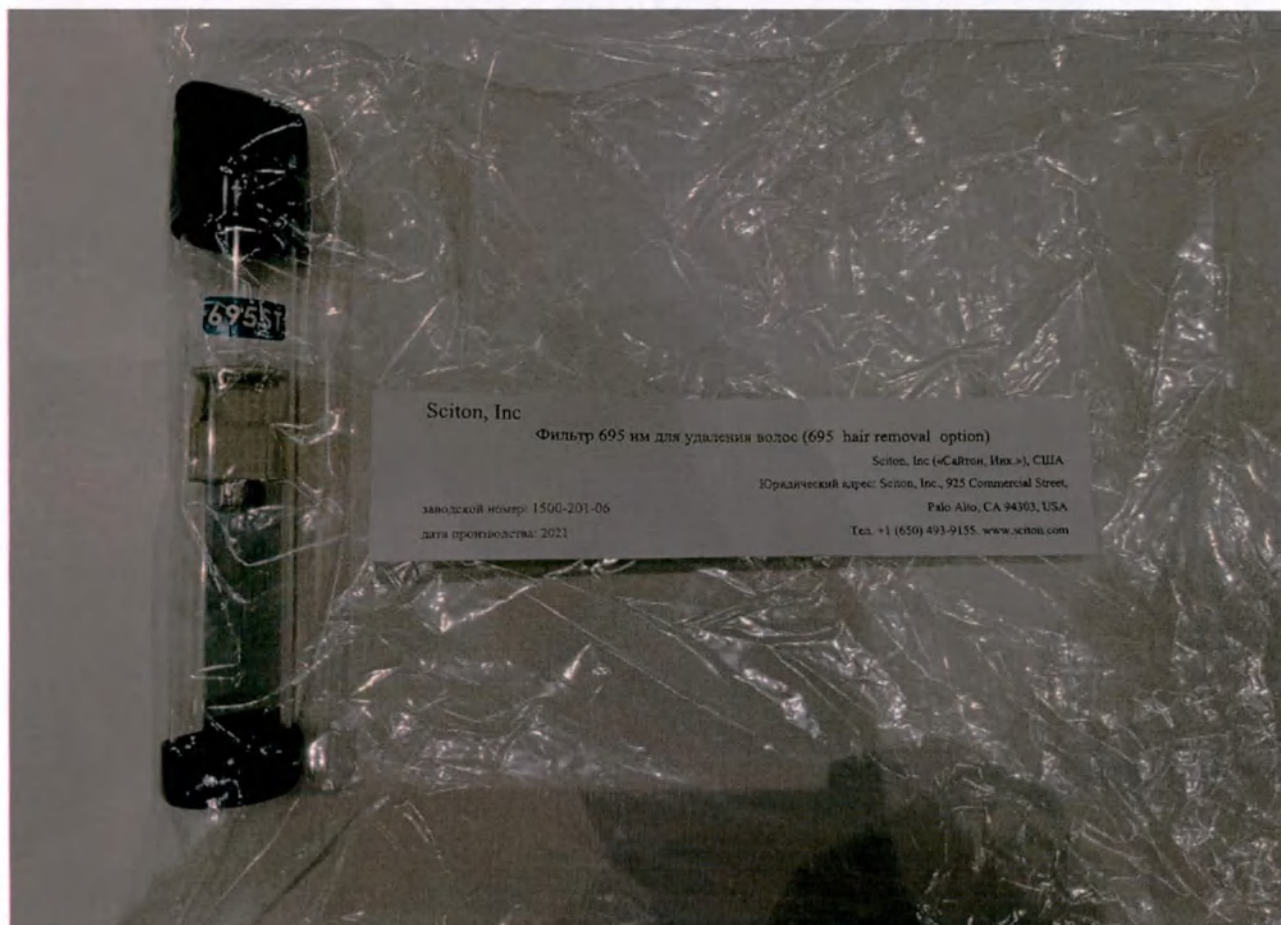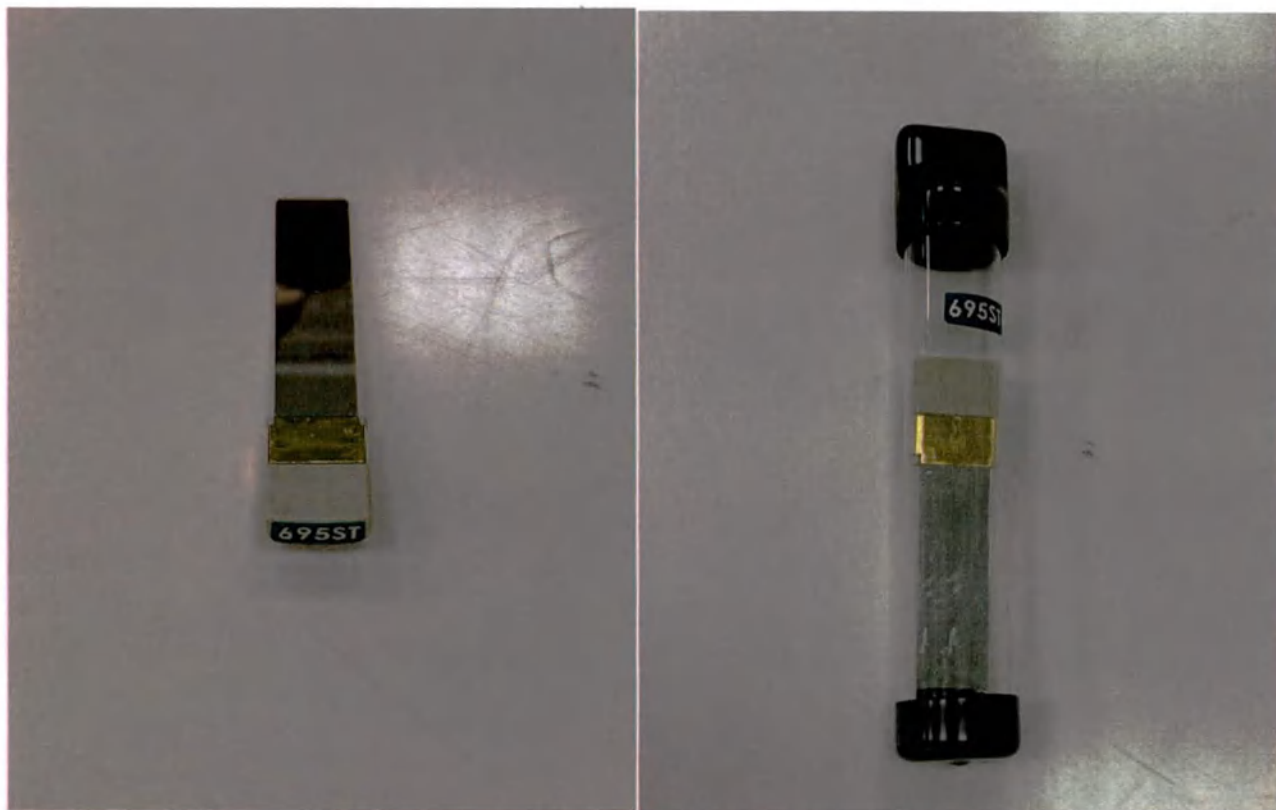

17. Фильтр 695 ST – 1 шт.;
 Световой фильтр из сапфирового стекла. Отсекает световой спектр вокруг длины волны 695 нм. Используется для термолифтинга

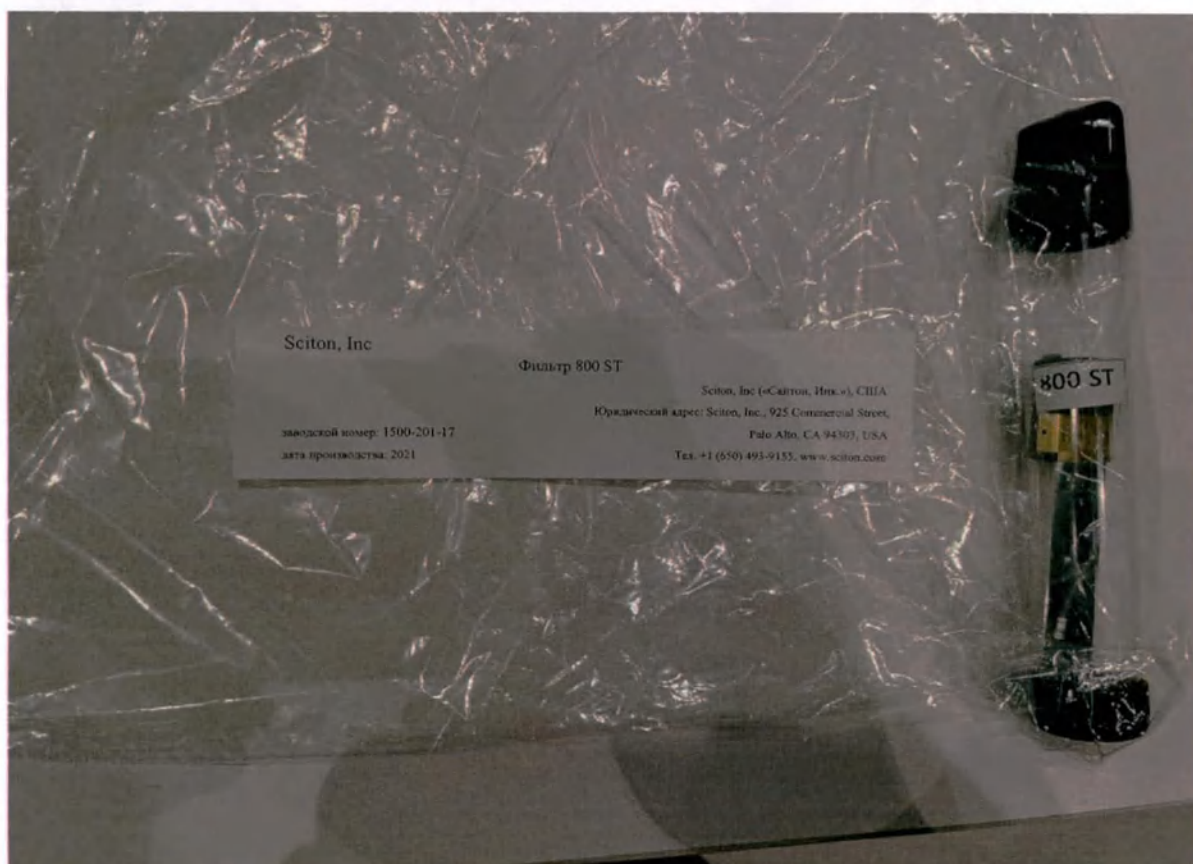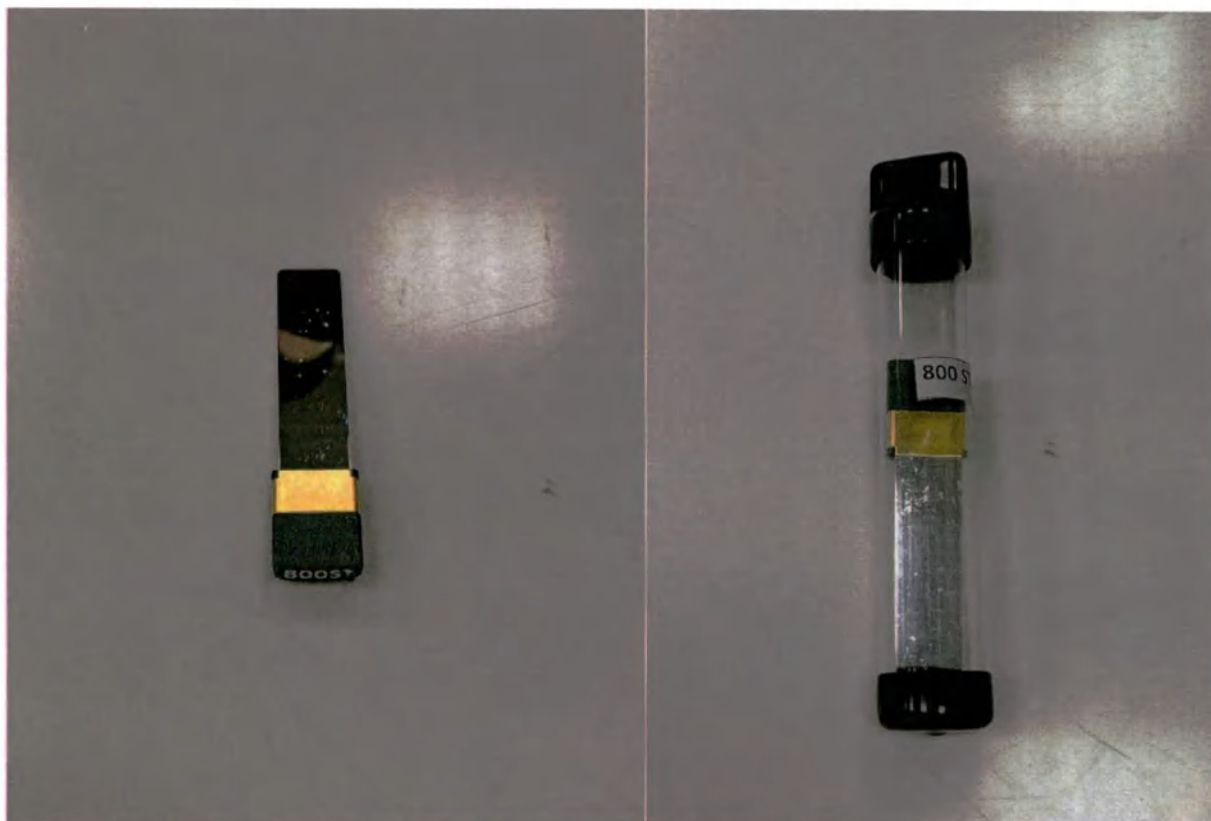


18. Фильтр 800 ST – 1 шт.;
Световой фильтр из сапфирового стекла. Отсекает световой спектр вокруг длины волны 800 нм. Используется для термолифтинга

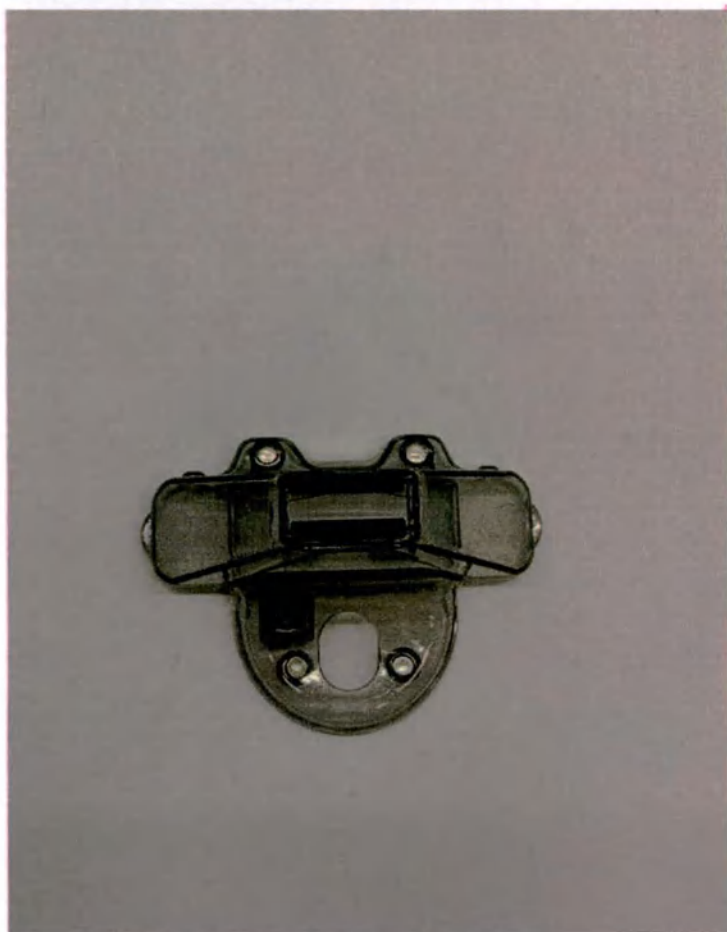



19. Одноразовый наконечник к Модулю Halo (Halo Vortex) 21 шт.;
Пластиковый одноразовый наконечник для сканера Halo




20. Усиленный кварцевый расширитель к Модулю DiVa 14 шт.; .
Пластиковый одноразовый наконечник для сканера diva

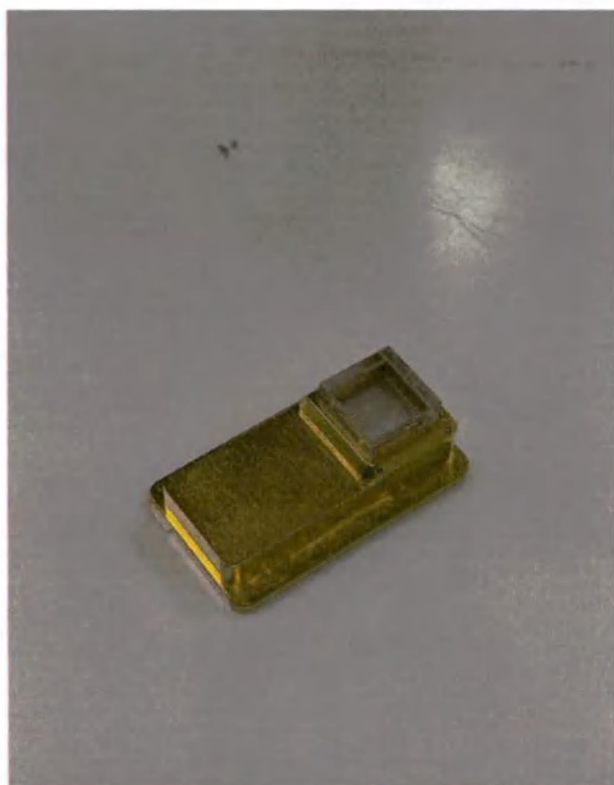

21. Адаптер квадратный 15 мм x 15 мм (15 mm x 15 mm square adapter) – 1 шт.;
Позолоченный адаптер с сапфировым стеклом квадратного сечения 15 мм на 15 мм.
Используется для ограничения площади воздействия пульсирующим светом

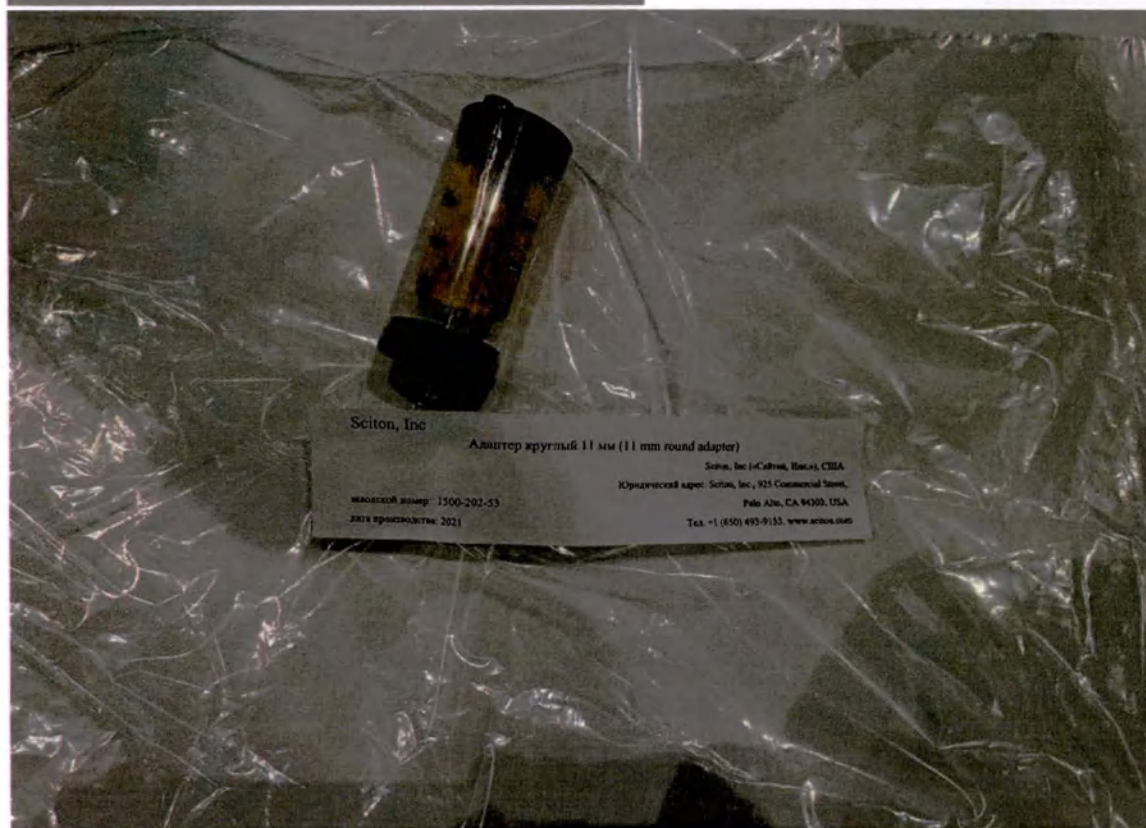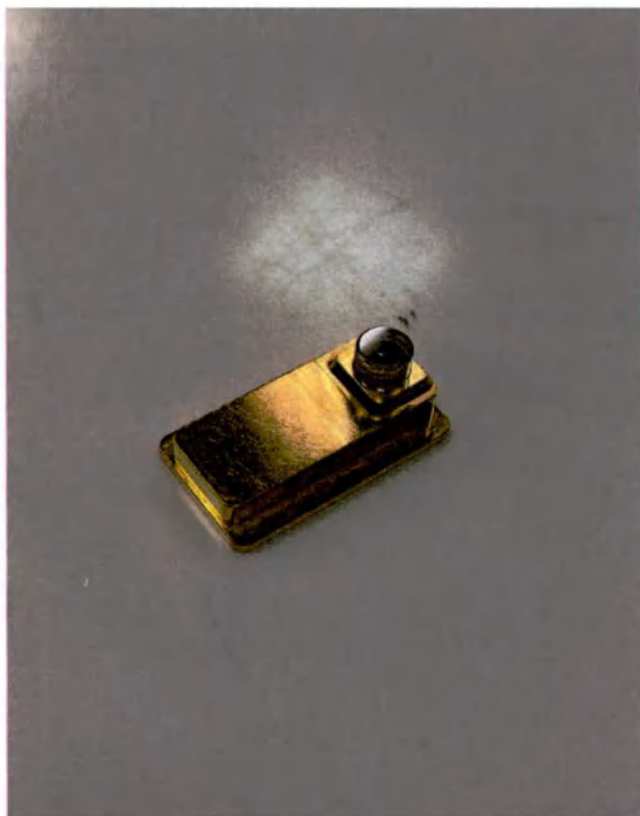

22. Адаптер круглый 11 мм (11 mm round adapter) – 1 шт.;
Позолоченный адаптер с сапфировым стеклом круглого сечения диаметром 11 мм.
Используется для ограничения площади воздействия пульсирующим светом

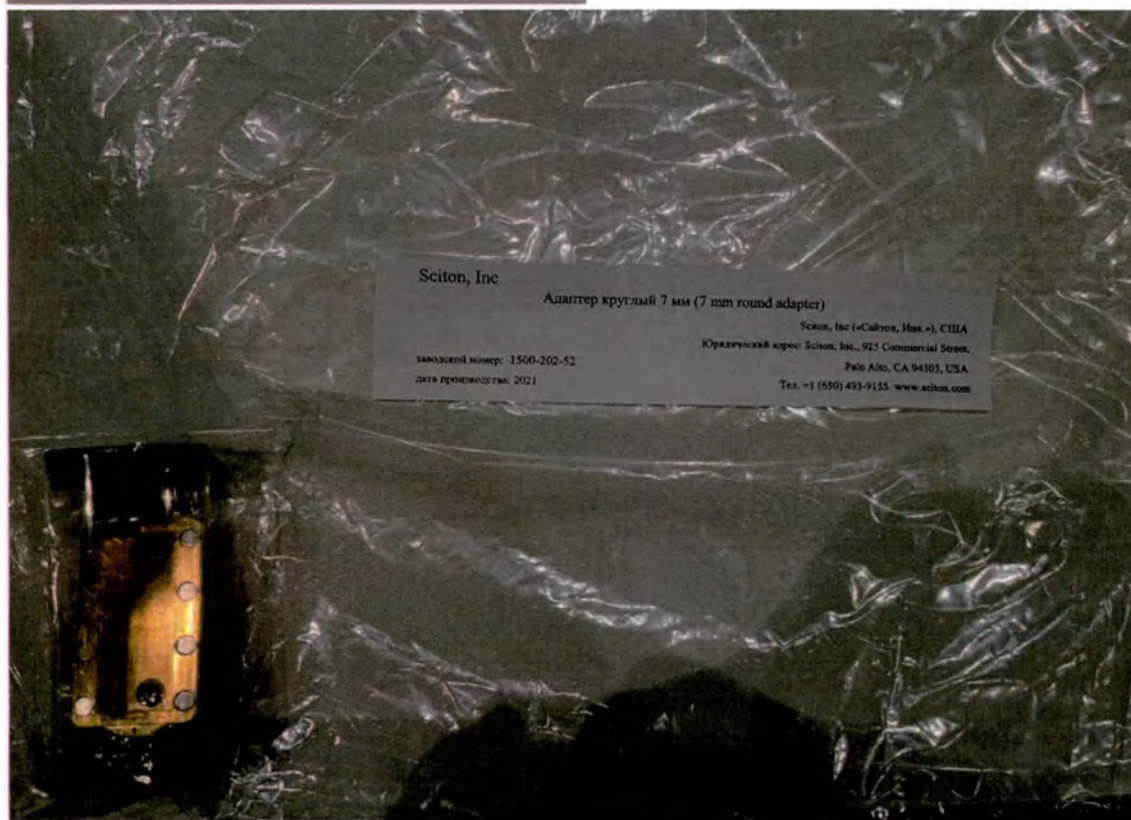


Sciton, Inc
Адаптер круглый 7 мм (7 mm round adapter)
Sciton, Inc. («Сайтон, Инк.»), США
Юридический адрес: Sciton, Inc., 925 Commercial Street,
Palo Alto, CA 94303, USA
Тел. +1 (650) 493-9155 www.sciton.com
заказной номер: 1500-202-52
дата производства: 2021

23. Адаптер круглый 7 мм (7 mm round adapter) – 1 шт.;
Позолоченный адаптер с сапфировым стеклом круглого сечения диаметром 7 мм.
Используется для ограничения площади воздействия пульсирующим светом



24. Модуль Halo терапевтический (Hybrid Fractional Module Halo) – 1 шт.;
 Сканер Halo. Используется для поверхностной лазерной шлифовки кожи с помощью двух лазерных модулей 2940 нм и 1470 нм в гибридном режиме


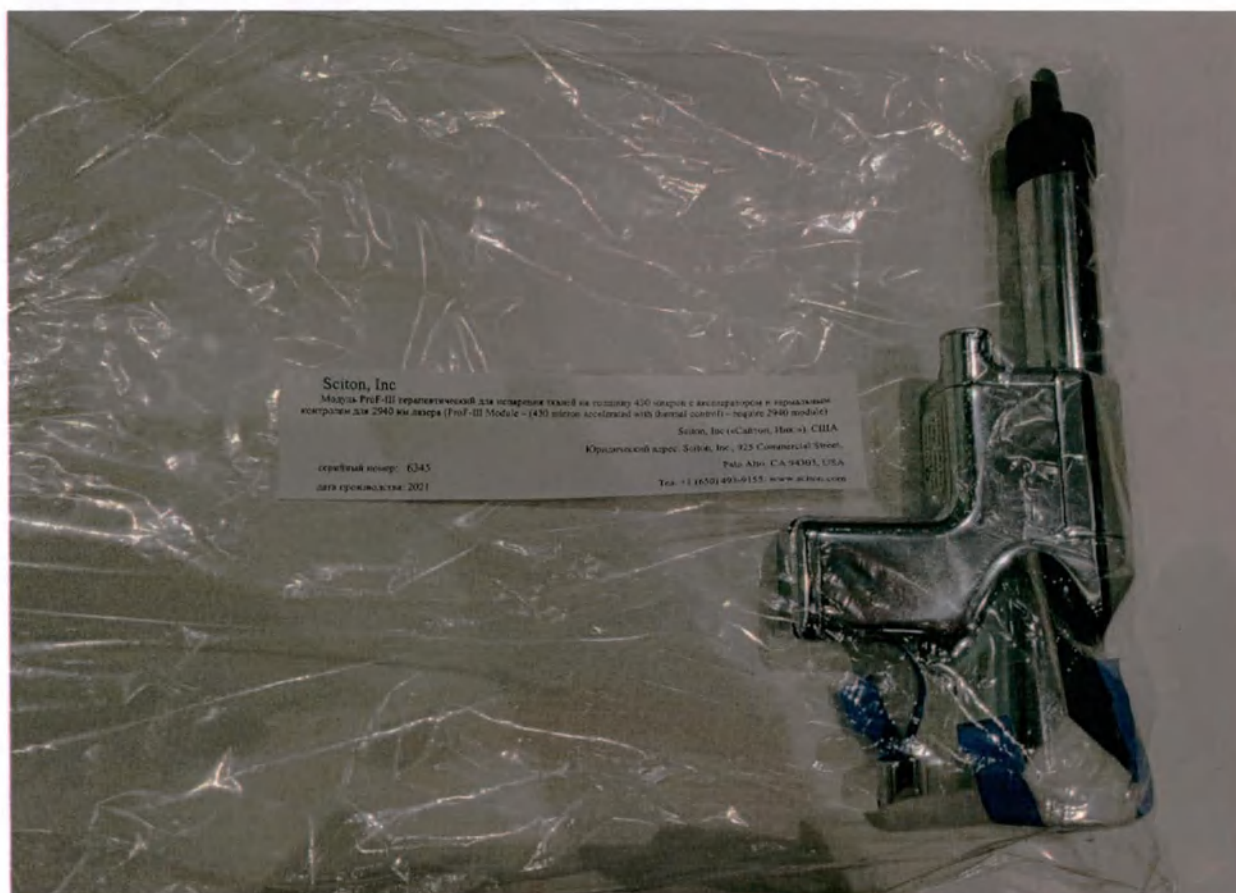


25. Модуль ProF-III терапевтический для испарения тканей на толщину 430 микрон с акселератором и термальным контролем для 2940 нм лазера (ProF-III Module – (430 micron accelerated with thermal control) – require 2940 module) -1 шт.;

Сканер ProF-III для фракционного фототермолиза. Используется с лазерным модулем 2940 нм





26. Модуль вагинальной терапии DiVa терапевтический (Vaginal Therapy Module DiVa) – 1 шт.;
 Сканер diva. Для вагинальной терапии с помощью двух лазерных модулей 2940 нм и 1470 нм в гибридном режиме

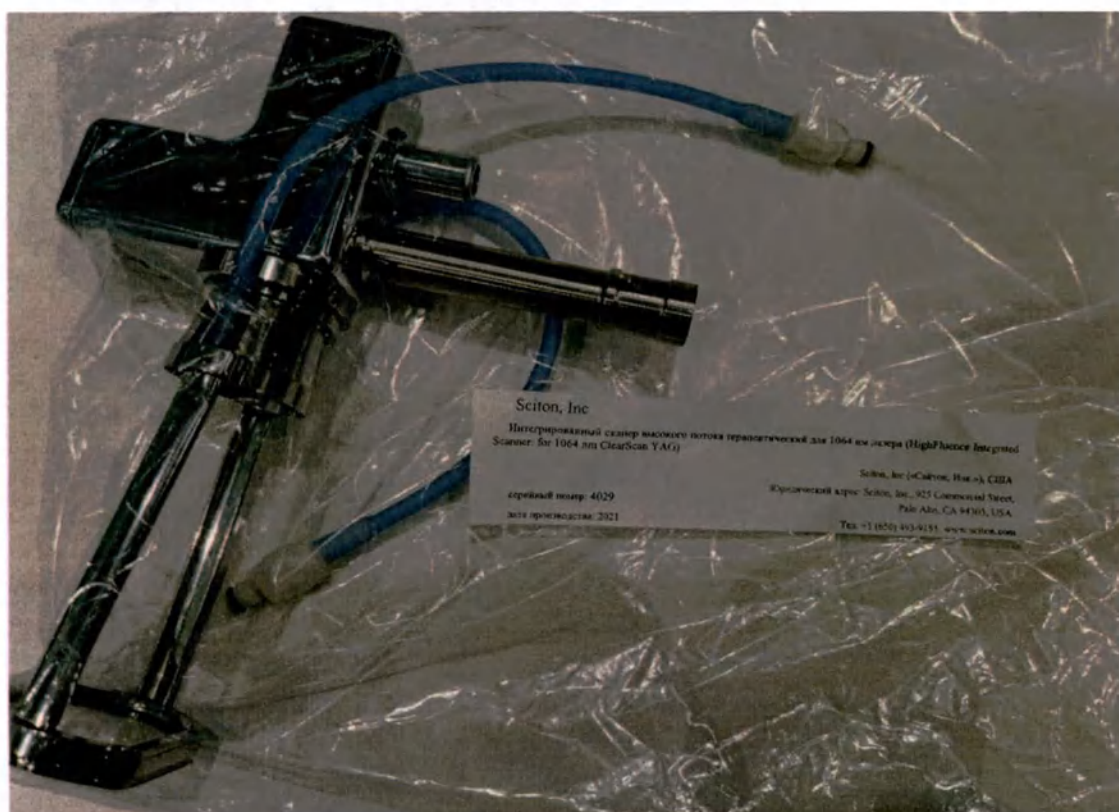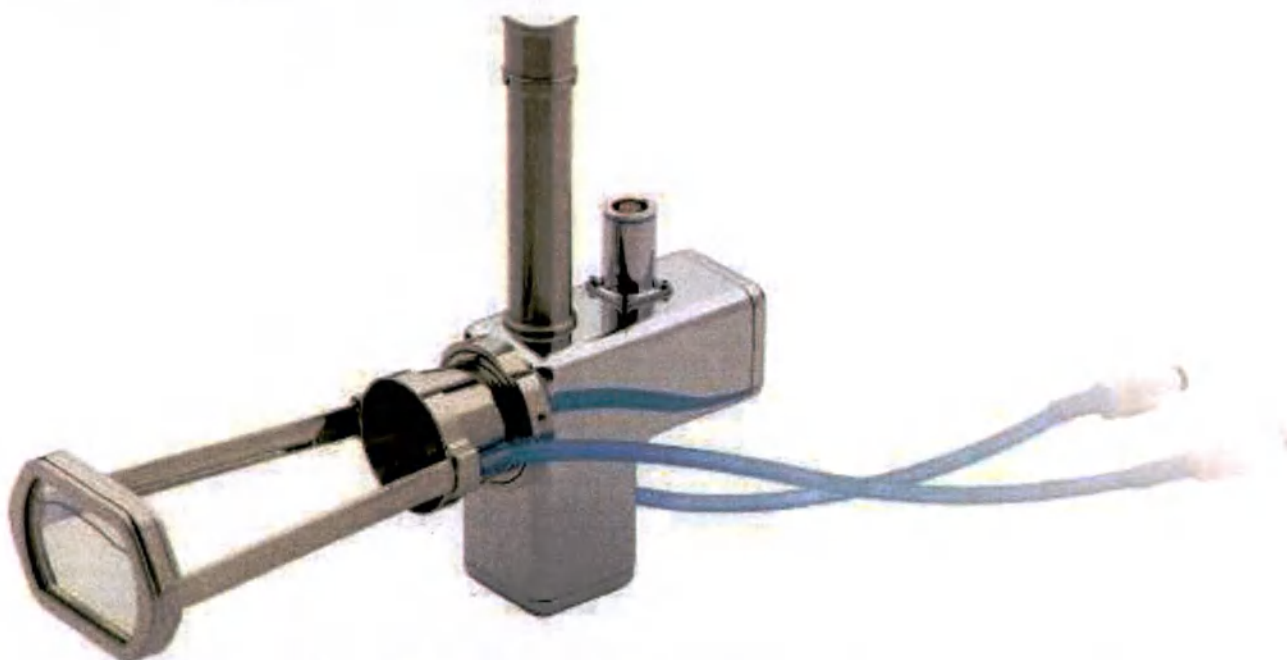


27. Интегрированный сканер высокого потока терапевтический для 1064 нм лазера (HighFluence Integrated Scanner: for 1064 nm ClearScan YAG) – 1 шт.;

Сканер ClearScan YAG модулем 1064 нм используется для лечения сосудистых нарушений, эпиляции, улучшения качества кожи, улучшения состояния ногтей.

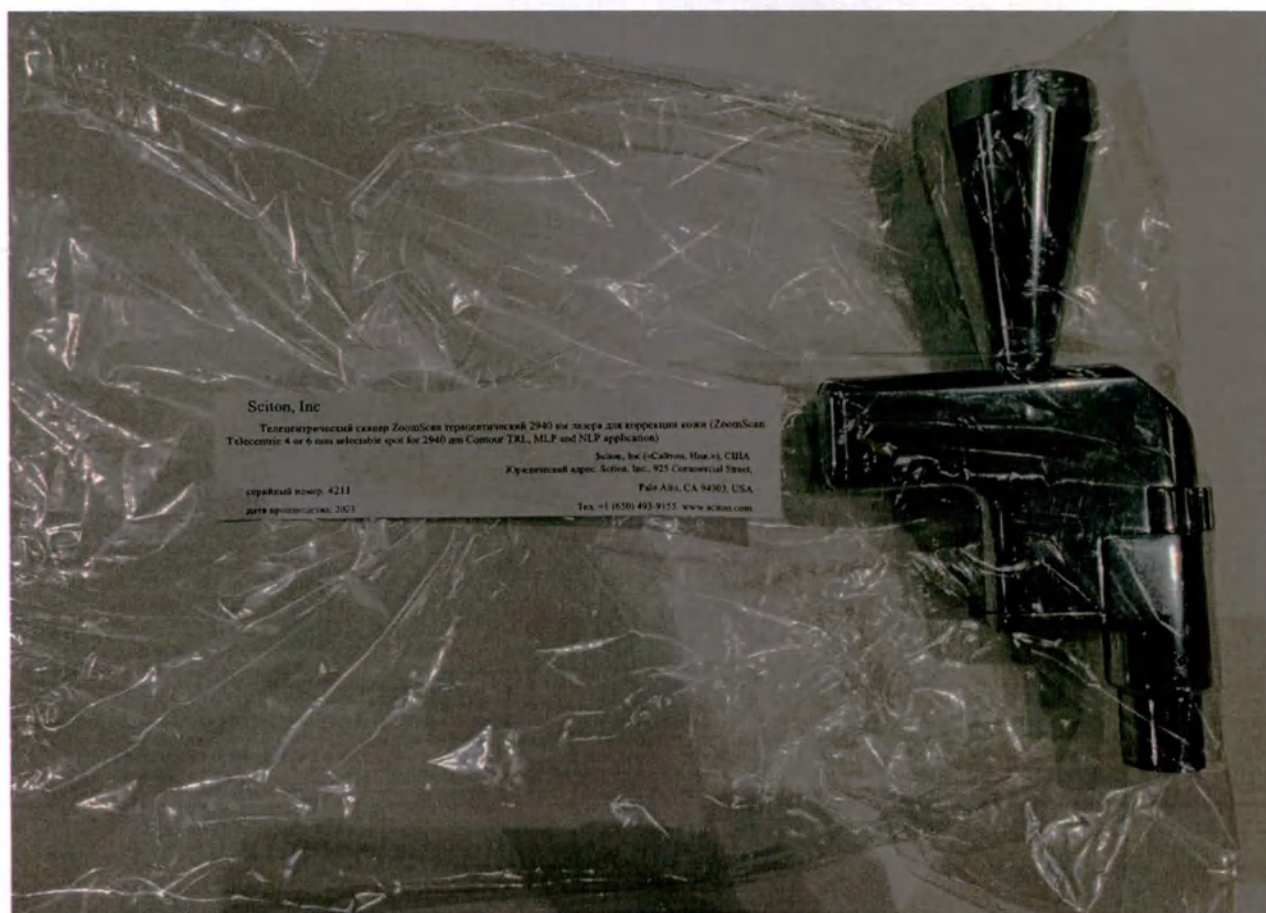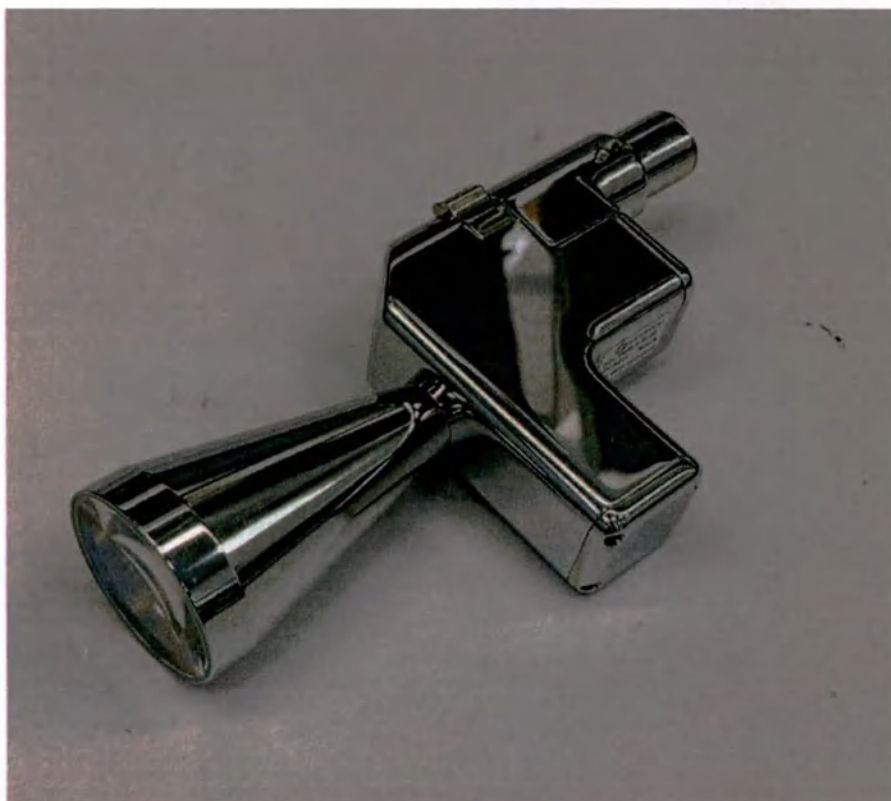


28. Телецентрический сканер ZoomScan терапевтический 2940 нм лазера для коррекции кожи (ZoomScan: Telecentric 4 or 6 mm selectable spot for 2940 nm Contour TRL, MLP and NLP application) – 1 шт.;

Сканер ZoomScan для модуля 2940 нм. Используется для косметической коррекции морщин и других последствий фотостарения.

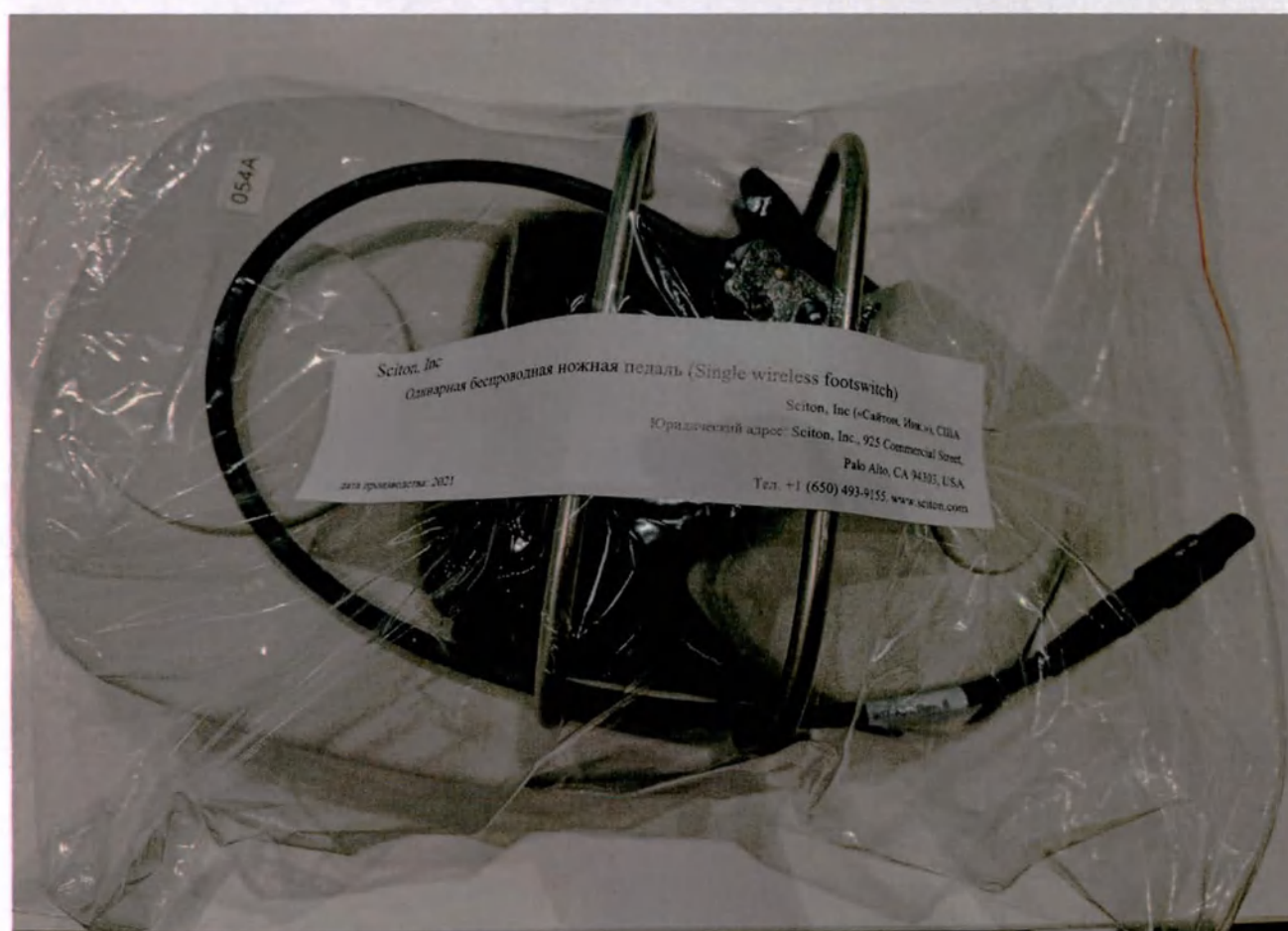


29. Одинарная беспроводная ножная педаль (Single wireless footswitch) – 1 шт.;
Беспроводная педаль для активирования вспышки лазера или пульсирующего света. В
защитном металлическом кожухе.


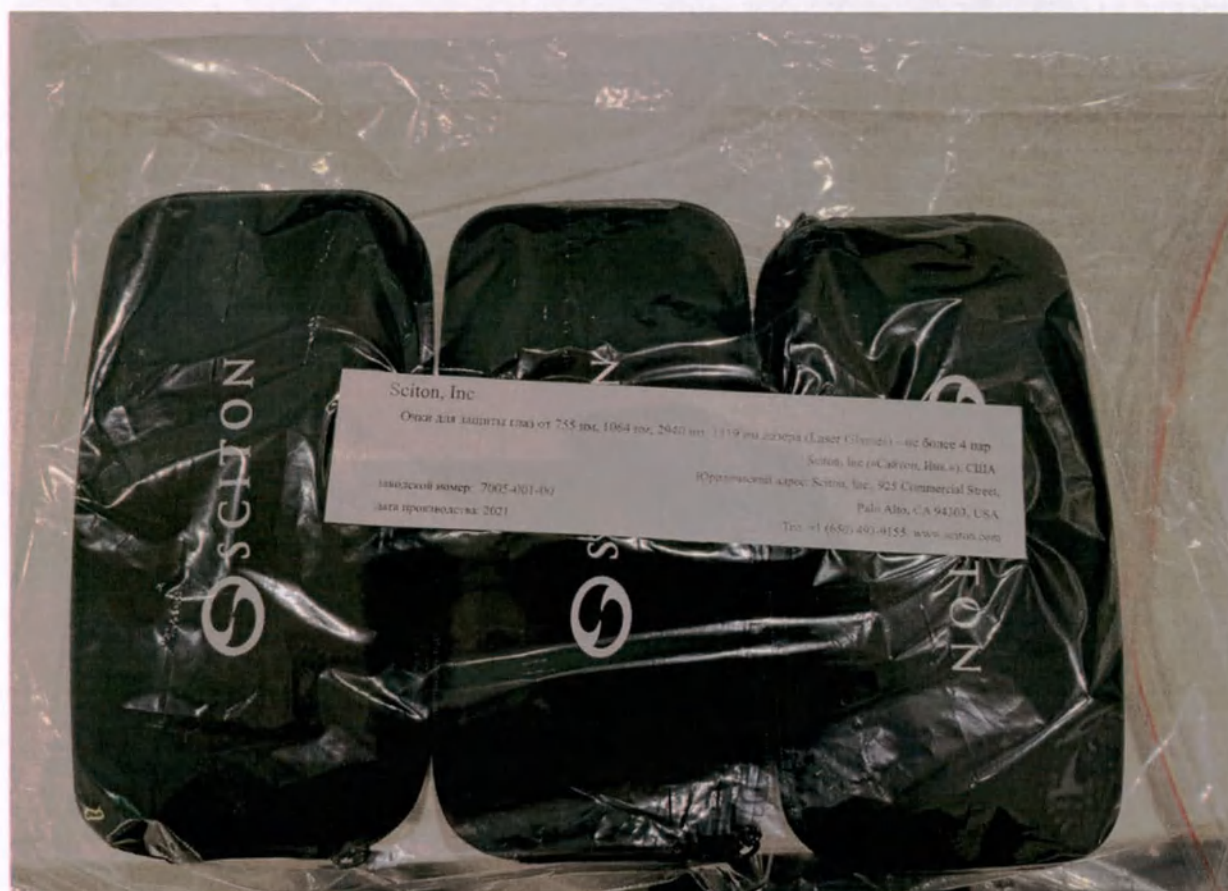


30. Очки для защиты глаз от 755 нм, 1064 нм, 2940 нм, 1319 нм лазера (Laser Glasses) – 3 шт.;

Очки пластиковые для защиты глаз врача от лазерного излучения от 755 нм и выше


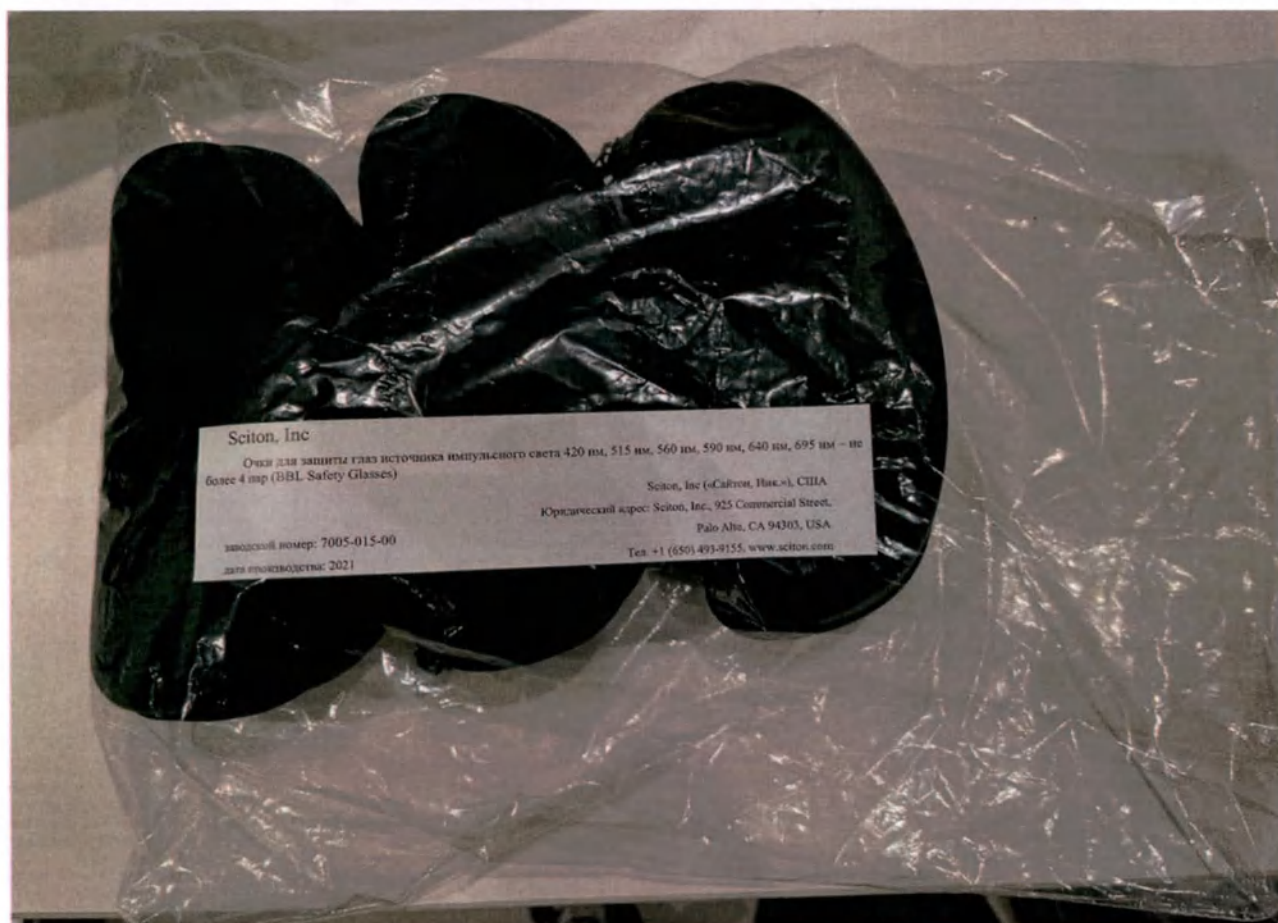


31. Очки для защиты глаз источника импульсного света 420 нм, 515 нм, 560 нм, 590 нм, 640 нм, 695 нм (BBL Safety Glasses) – 3 шт.;
 Пластиковые очки врача для защиты от излучения от пульсирующего света

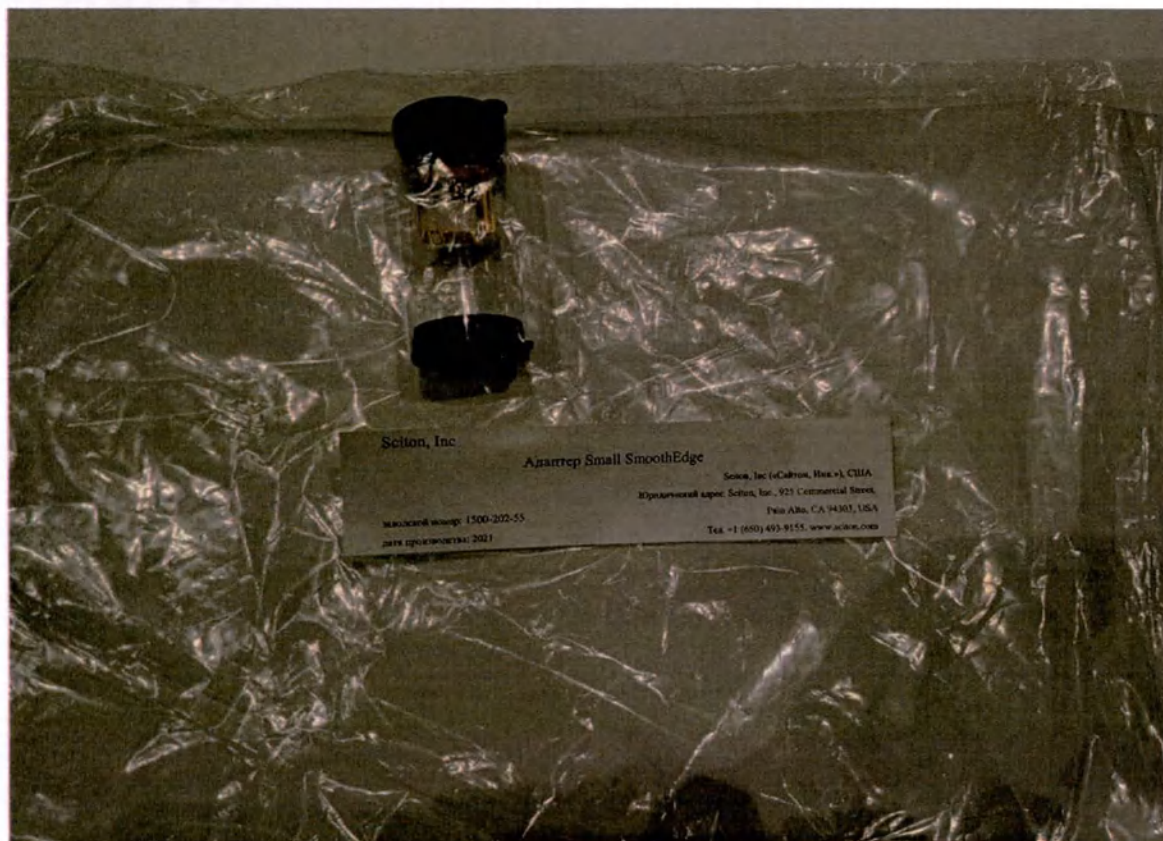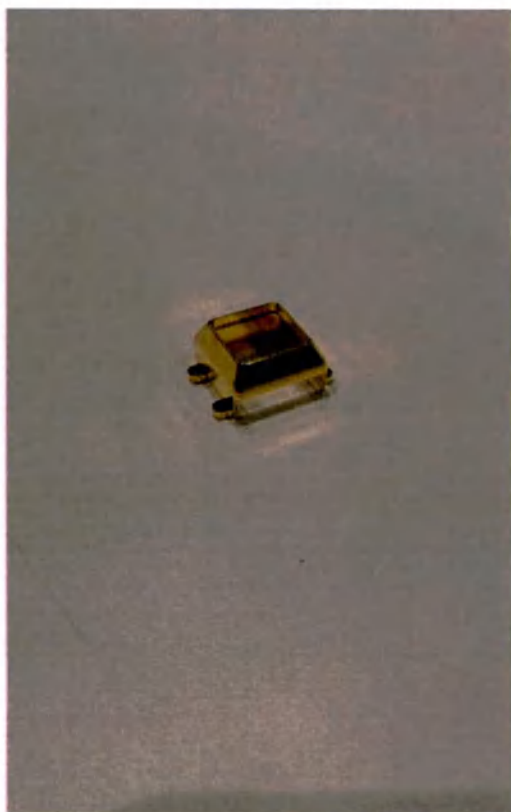


32. Адаптер Small SmoothEdge – 1 шт.

Позолоченный адаптер без сапфирового стекла квадратного сечения 15 мм на 15 мм. Используется с адаптером квадратным для ограничения площади воздействия пульсирующим светом

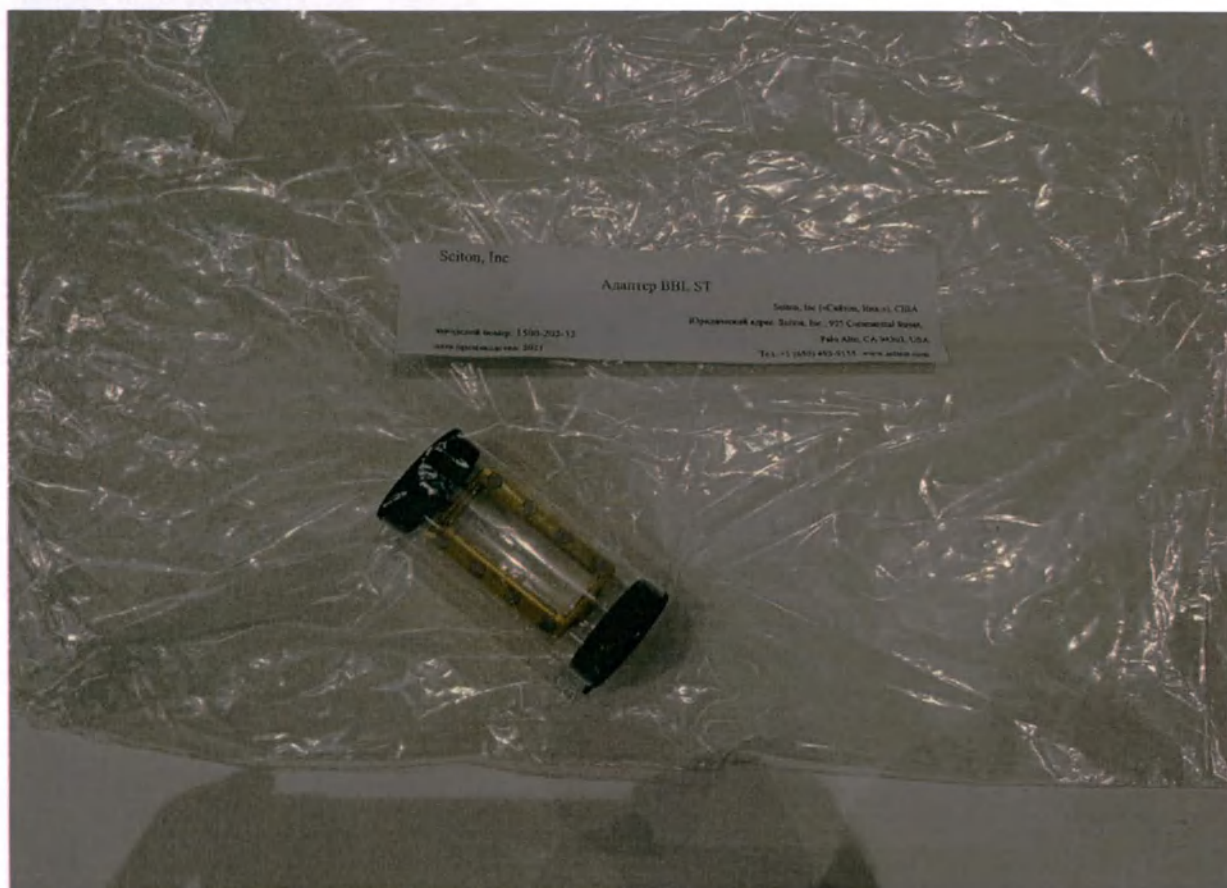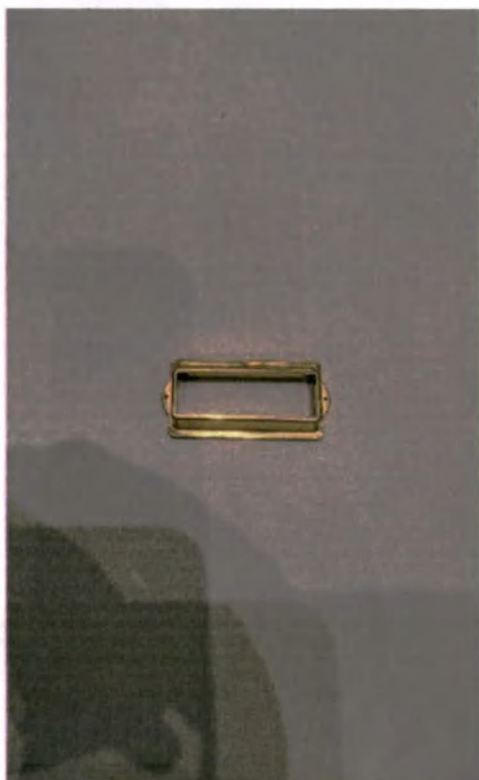



33. Адаптер BBL ST – 1 шт.

Позолоченный адаптер без сапфирового стекла прямоугольного сечения 15 мм на 45 мм. Используется с адаптером квадратным для ограничения площади воздействия пульсирующим светом

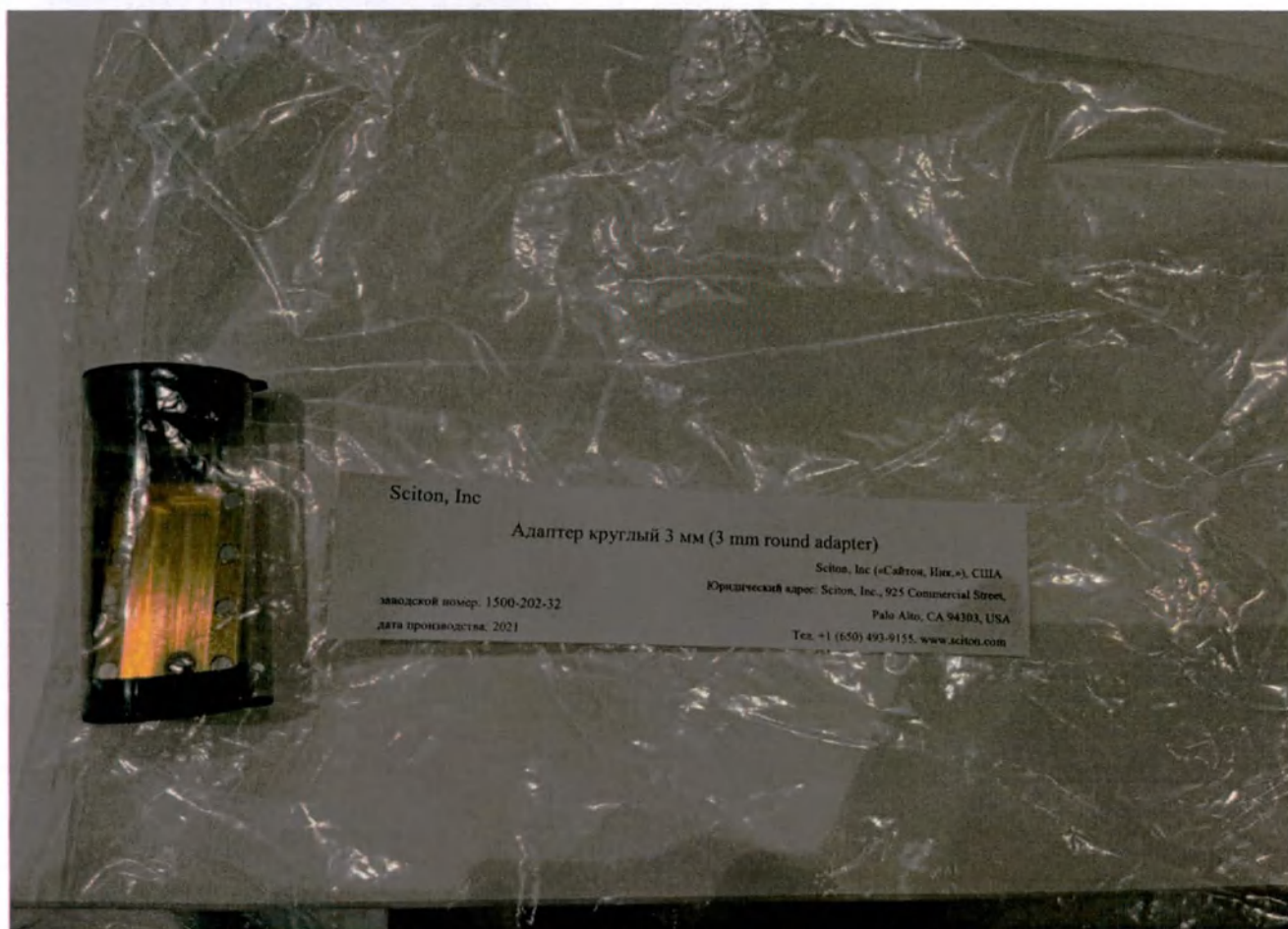


34. Адаптер круглый 3 мм (3 mm round adapter) – 1 шт.

Позолоченный адаптер с сапфировым стеклом круглого сечения диаметром 3 мм. Используется для ограничения площади воздействия пульсирующим светом

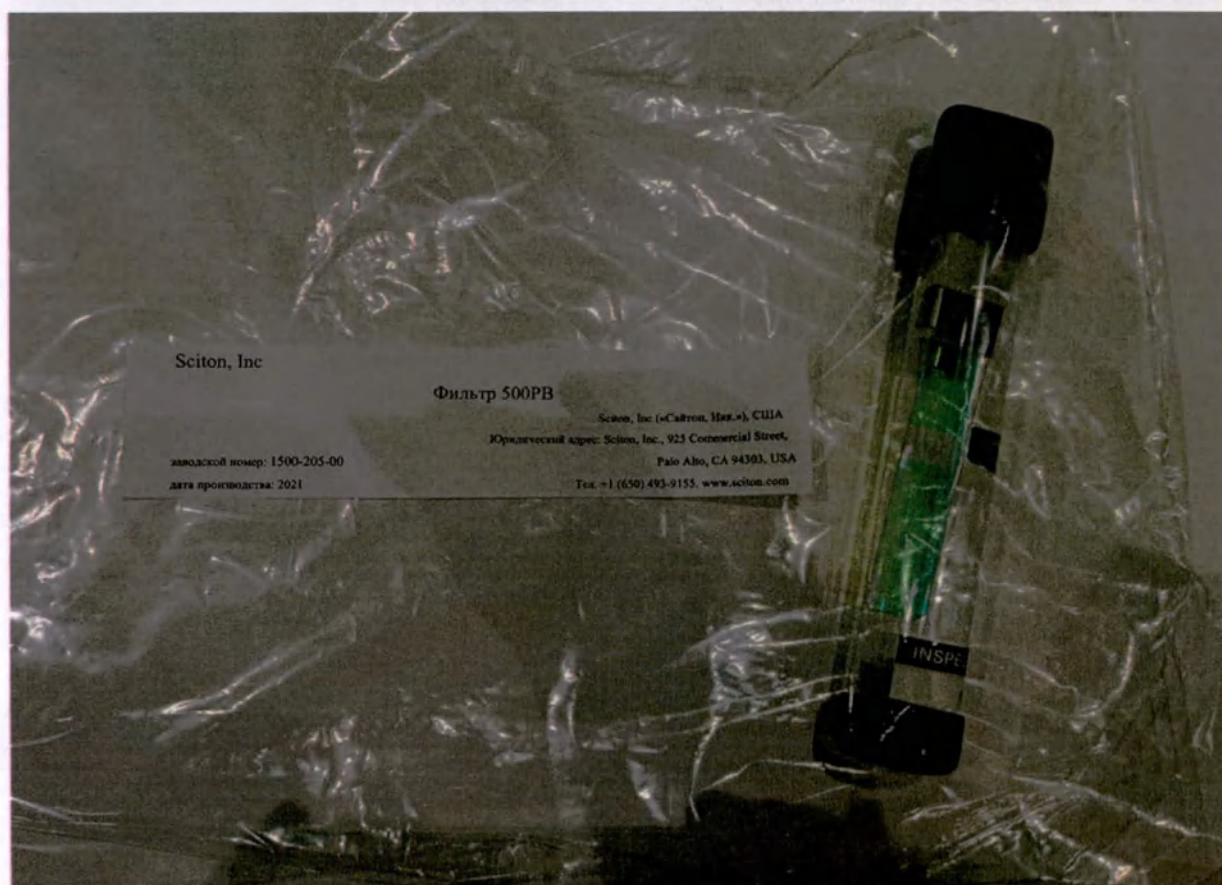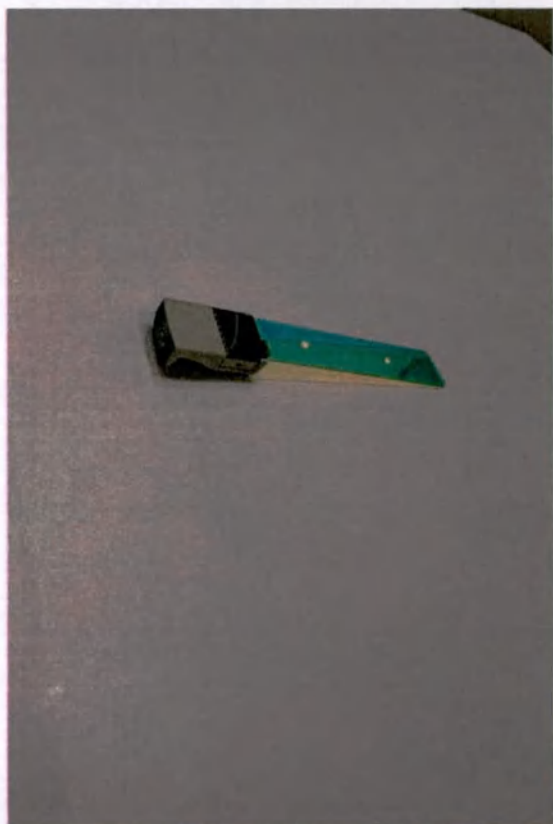


35. Фильтр 500PB – 1 шт.

Световой фильтр из сапфирового стекла. Отсекает световой спектр вокруг длины волны 500PB нм. Используется для коррекции кожи

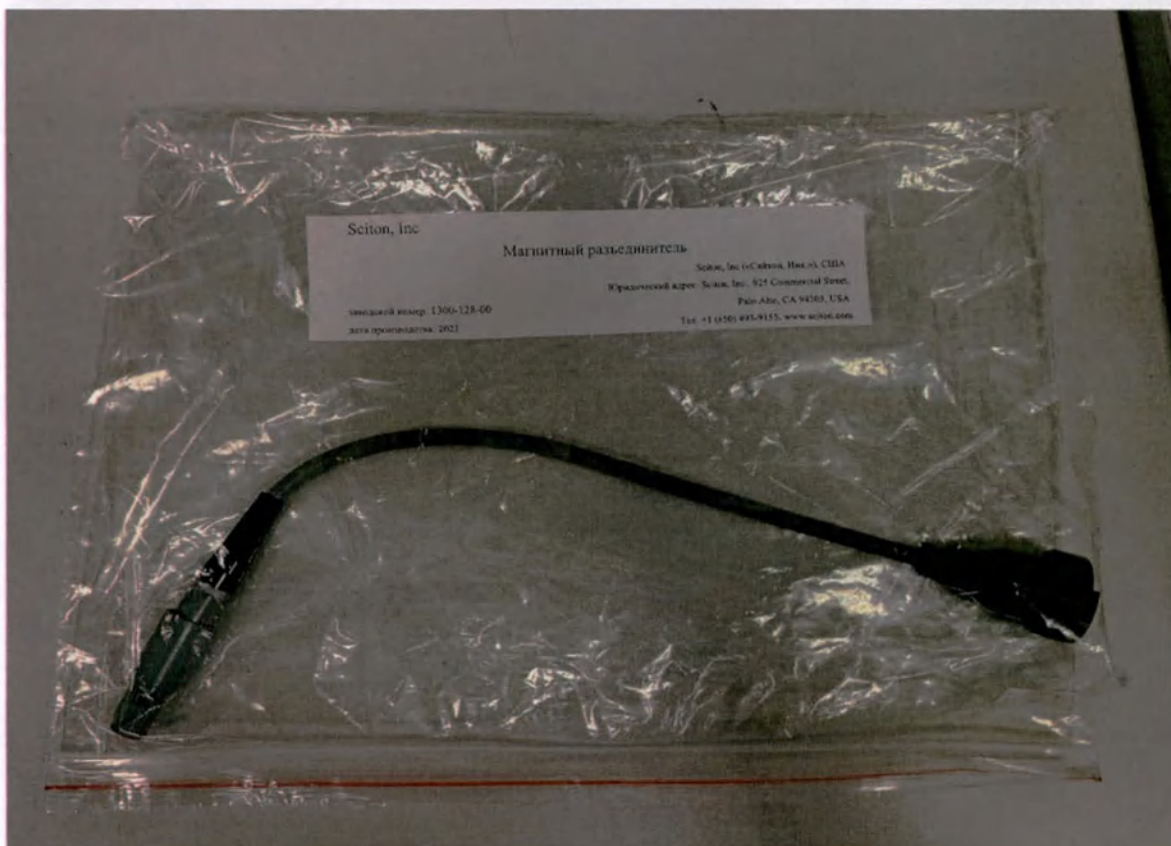


36. Магнитный разъединитель – 1 шт.

Пигтейл от педали. Провод, на одном конце лето разъем для подключения к аппарату, на противоположном конце магнитный разъем для подключения к педали

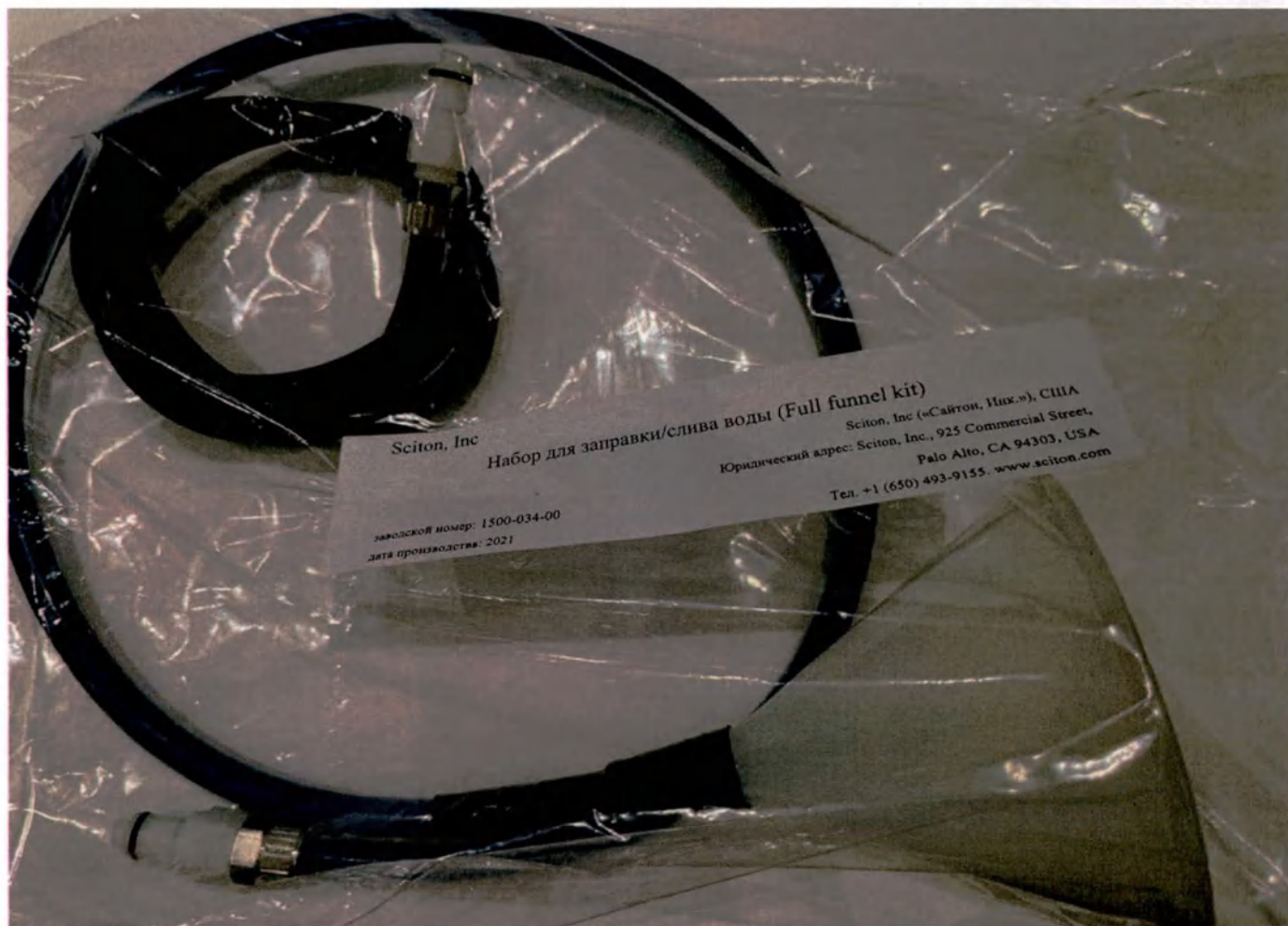


37. Набор для заправки/слива воды (Full funnel kit) – 1 шт.

Набор из шлангов и воронки для заправки и слива дистиллированной воды с аппарата

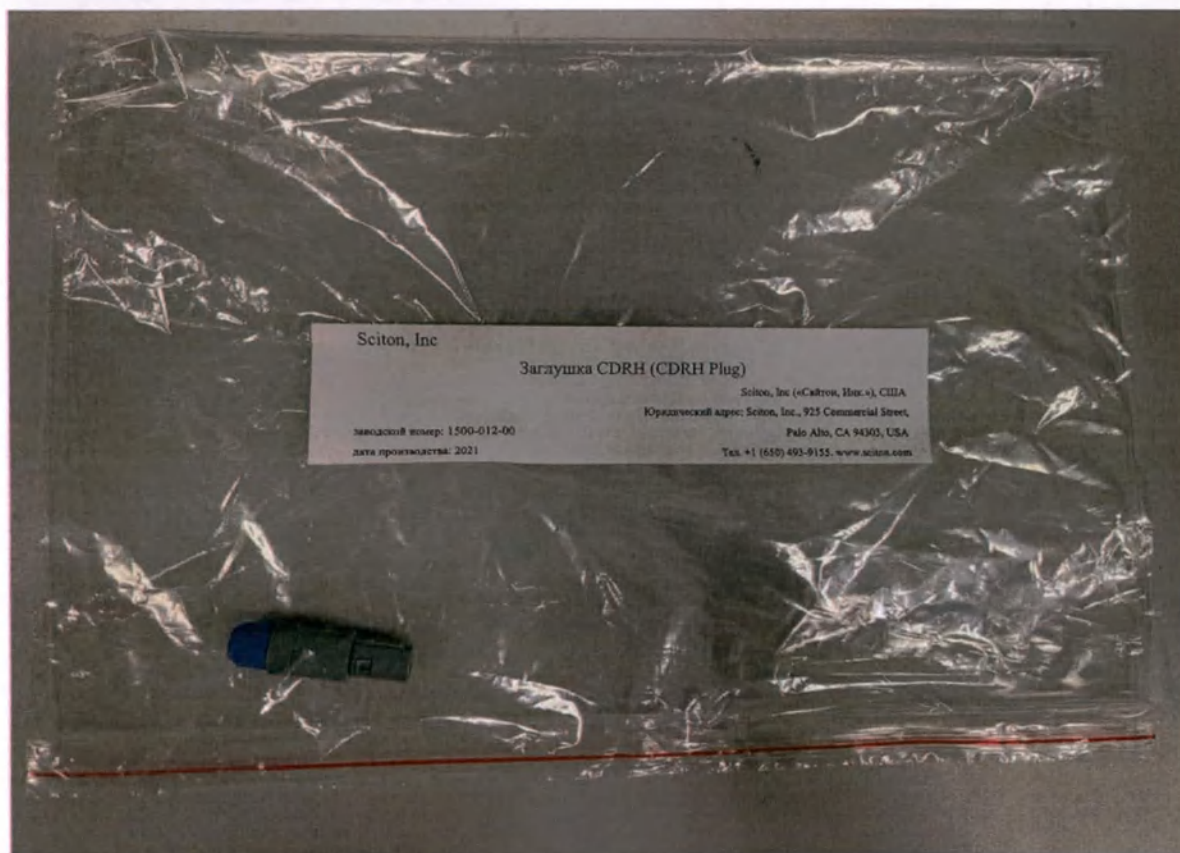


38. Заглушка CDRH (CDRH Plug) – 1 шт.

Interlock заглушка. Состоит из пластика. Используется для подключения аппарат к входной двери кабинета

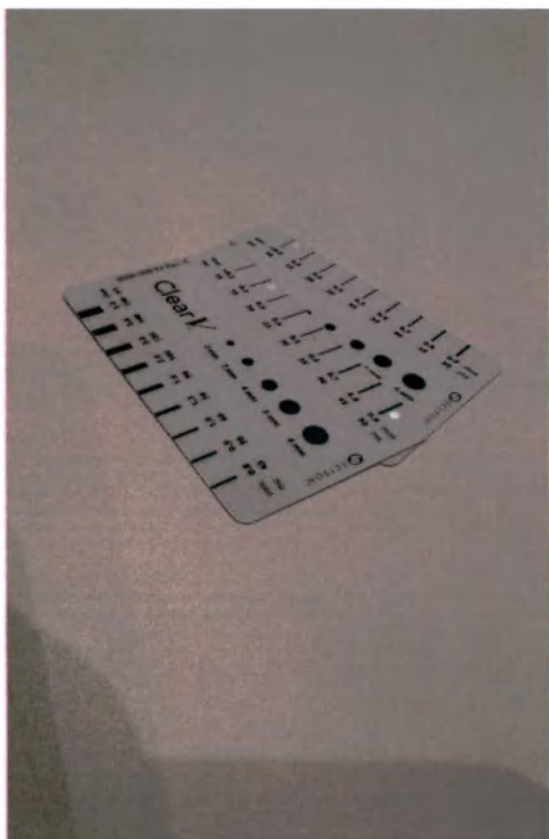



39. Карточка для измерения диаметра сосудов (BBL Vien Card) – 2 шт.

Пластиковая карта с метками для определения диаметра сосудов

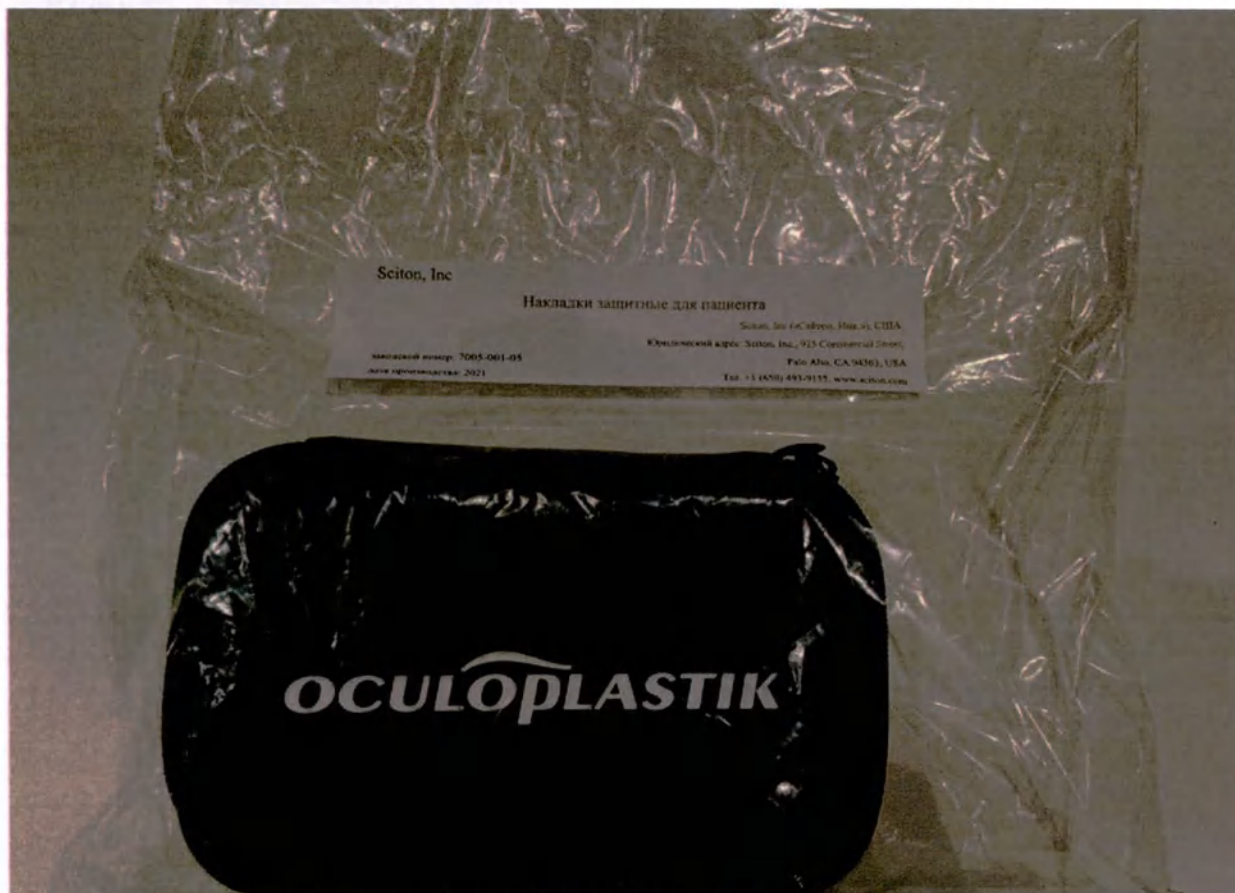


40. Накладки защитные для пациента – 1 шт.

Накладные шильды для пациента из нержавеющей стали для защиты глаз пациента от лазерного и светового излучения

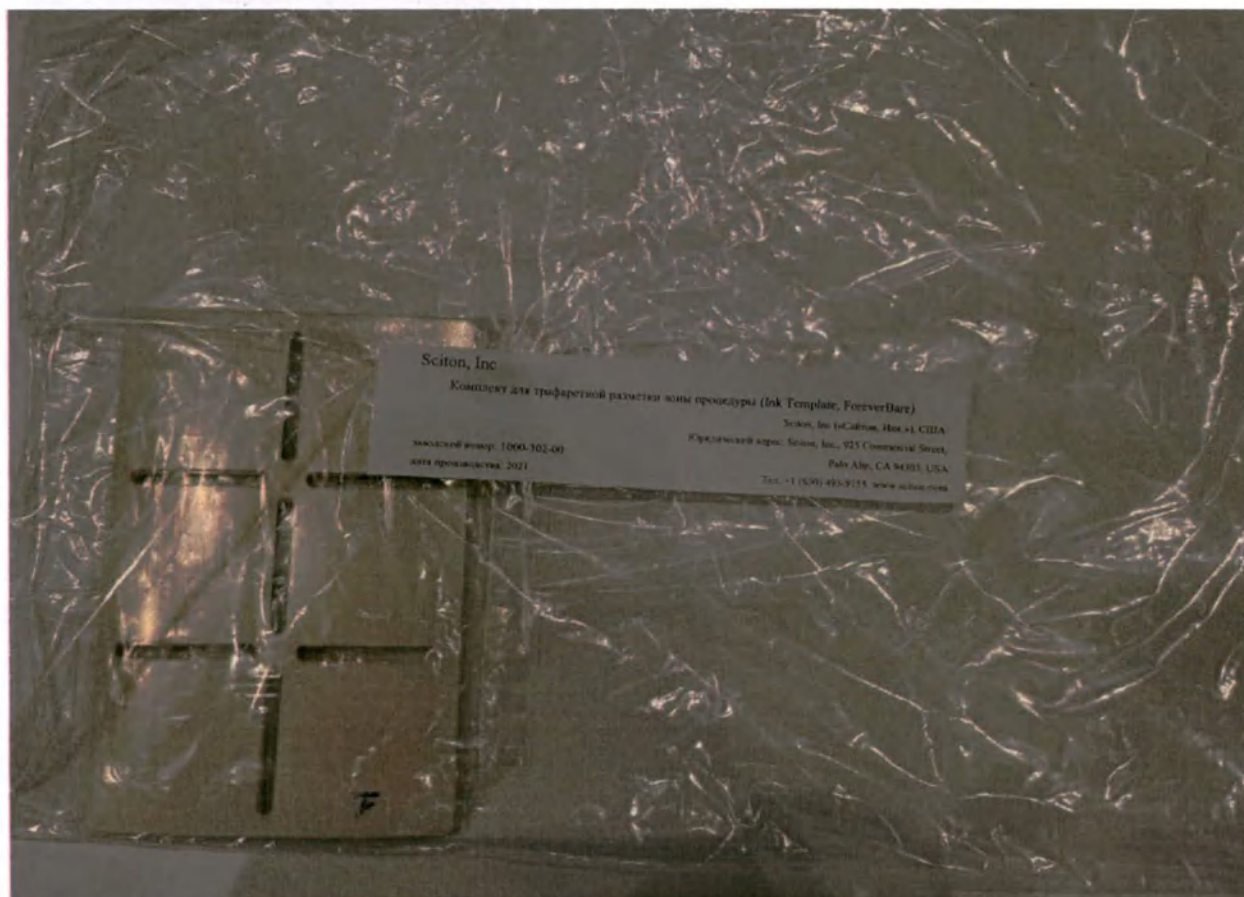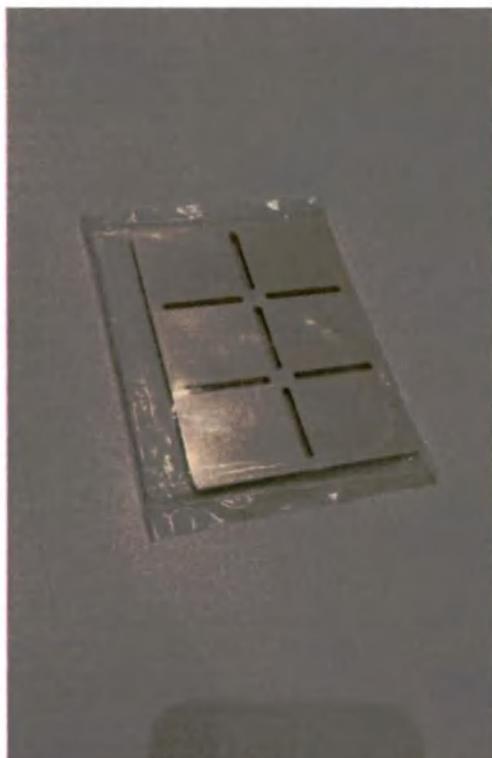


41. Комплект для трафаретной разметки зоны процедуры (Ink Template, ForeverBare) – упаковка 50 штук – 1 шт.

Трафареты для использования в модуле широкополосного пульсирующего света

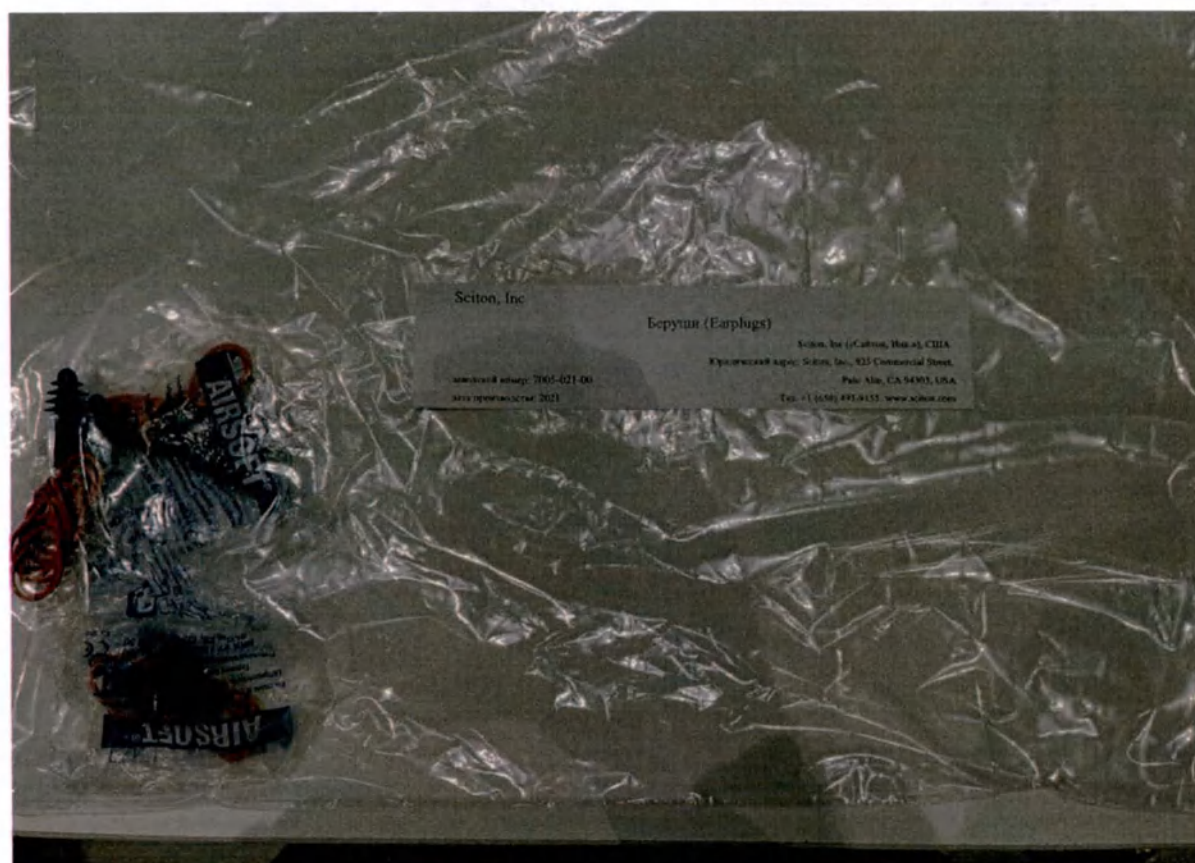


42. Беруши (Earplugs) – 3 шт

Беруши защищают уши от громкого звука. Например при лазерной шлифовке

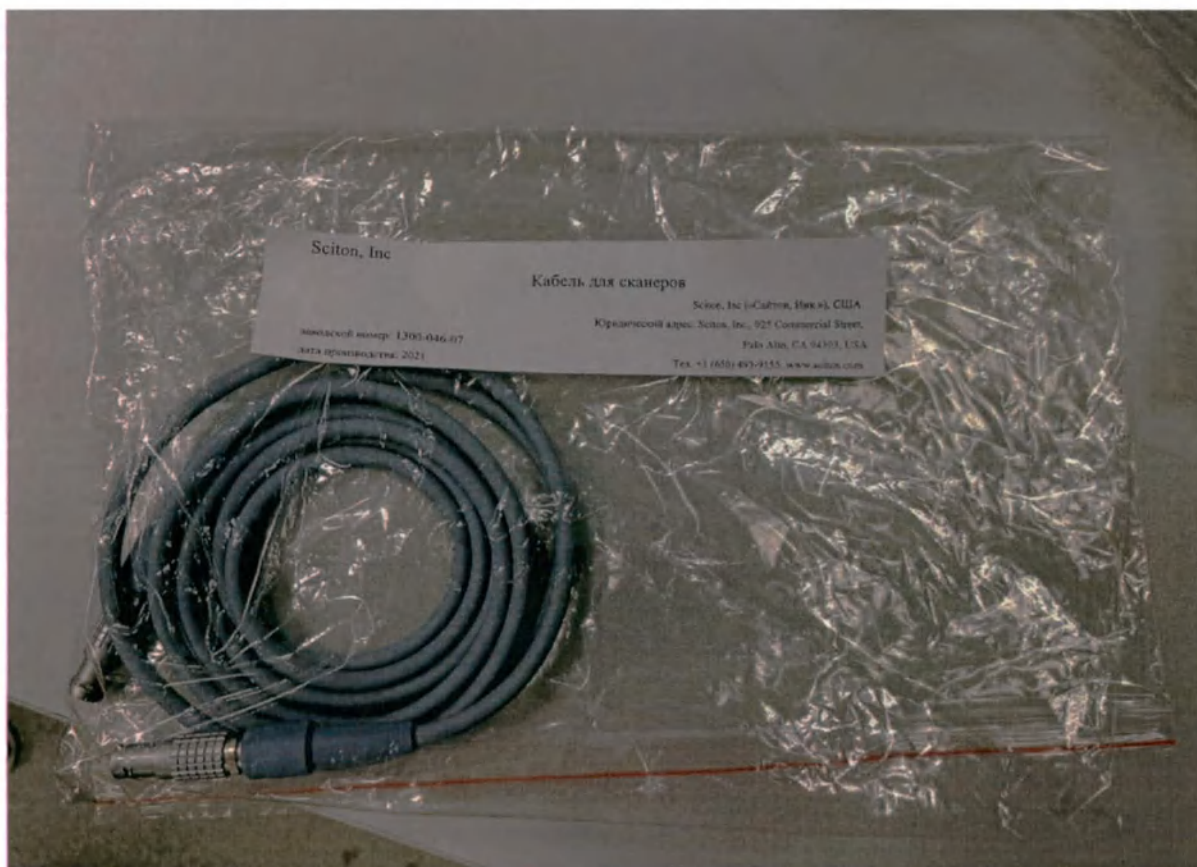


43. Кабель для сканеров – 1 шт.

Кабель с разъемами на обоих концах, с помощью которого подключаются все сканеры к аппарату для передачи данных и управления ими

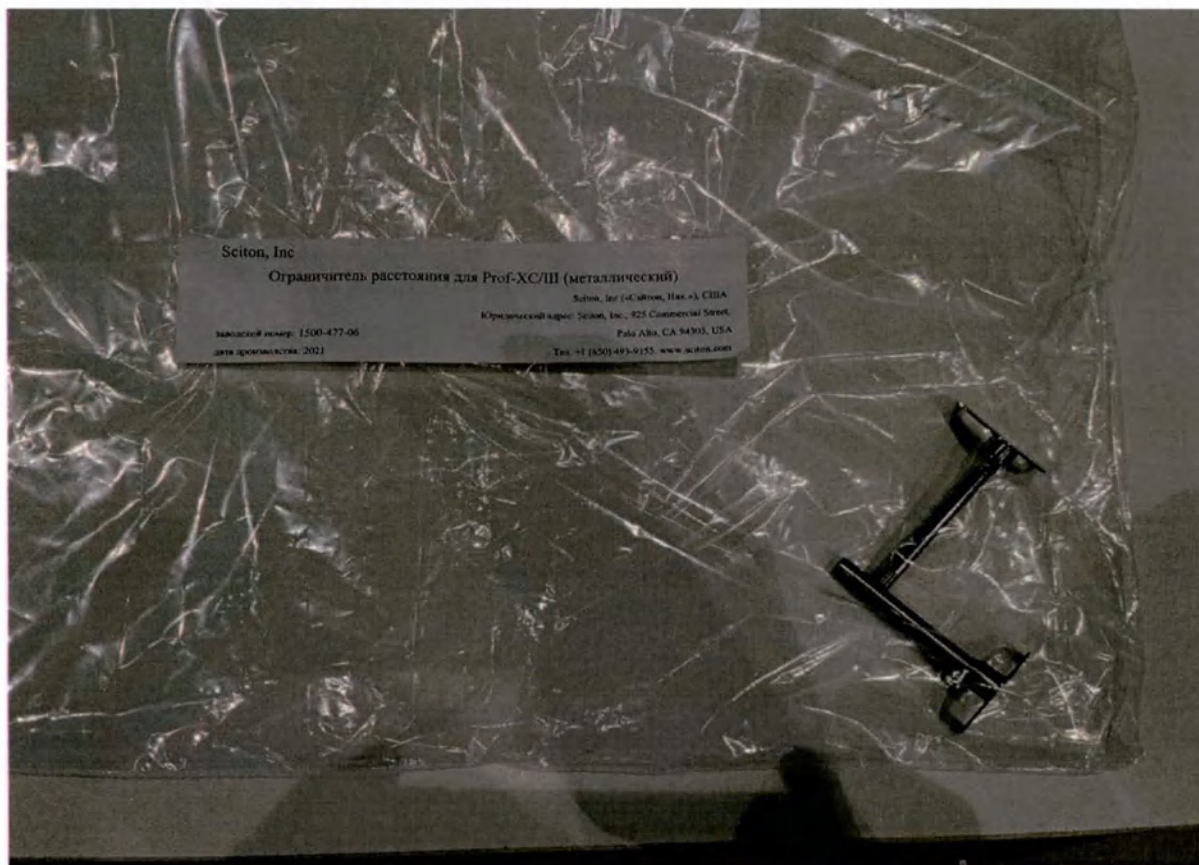


44. Ограничитель расстояния для Prof-XC/III (металлический) – 2 шт.

Металлический ограничитель фокусного расстояния для сканера ProF-XC/III

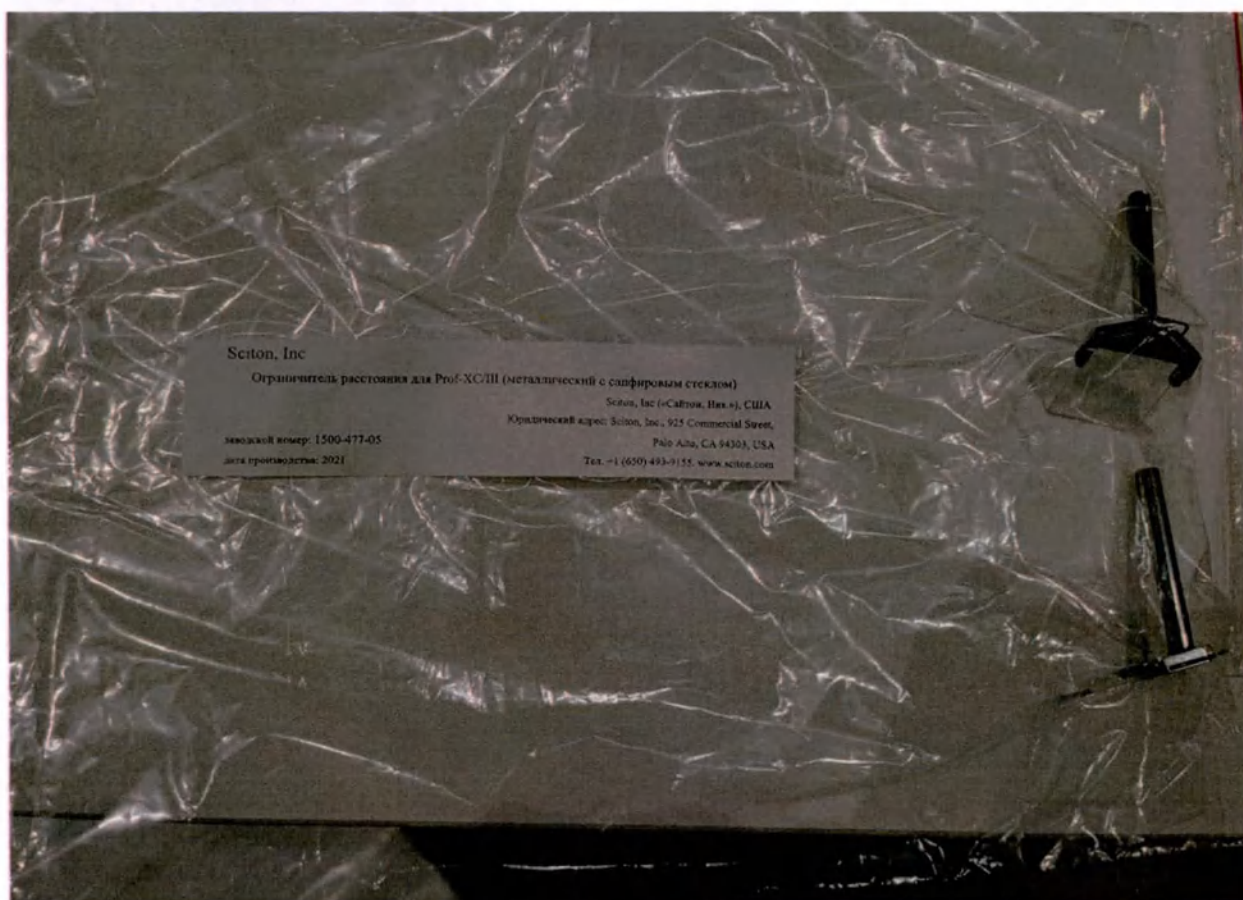


45. Ограничитель расстояния для Prof-XC/III (металлический с сапфировым стеклом) – 2 шт.

Металлический ограничитель фокусного расстояния с сапфировым стеклом для сканера Prof-XC/III

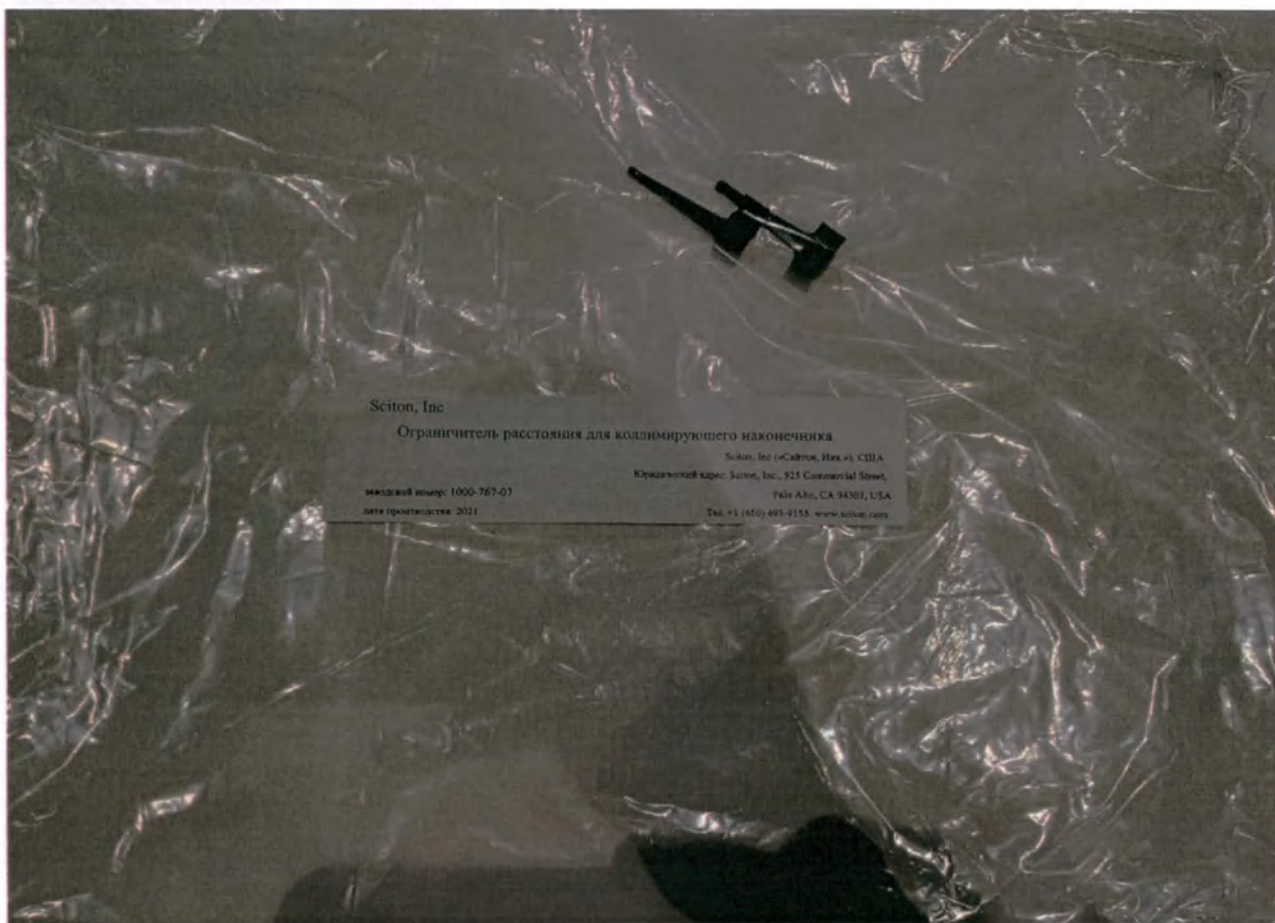


46. Ограничитель расстояния для коллимирующего наконечника – 2 шт.

Металлический ограничитель фокусного расстояния для коллимирующего наконечника

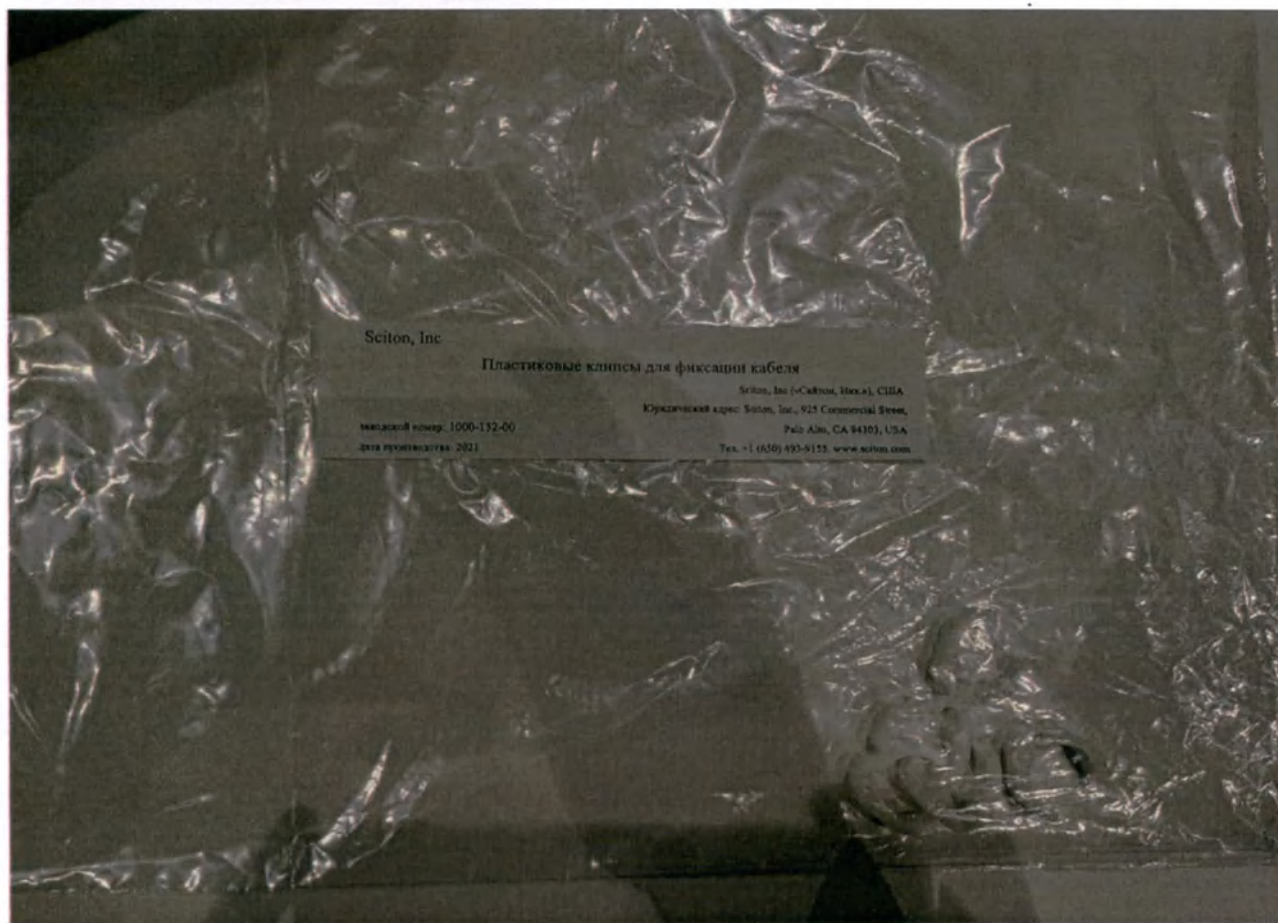

47. Пластиковые клипсы для фиксации кабеля – 5 шт.

Пластиковые клипсы для крепления кабеля для сканеров на жестком артикуляторе

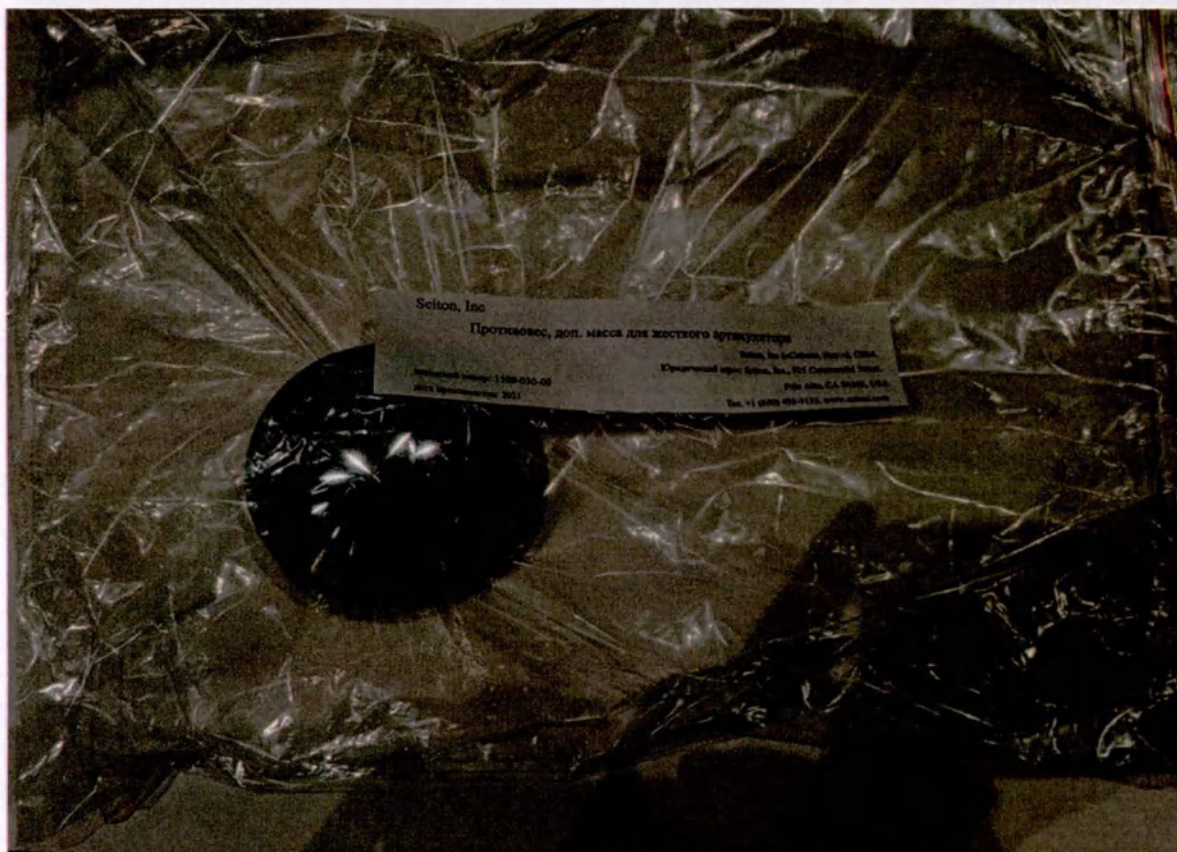


49. Противовес, доп. масса для жесткого артикулятора – 1 шт.

Дополнительный груз для жесткого артикулятора для корректной развесовки сканеров




50. Шланг для модуля Halo – 2 шт.

Одноразовый шланг для сканера Halo. Необходим для подключения дополнительного охлаждения и дымоотвода при процедуре

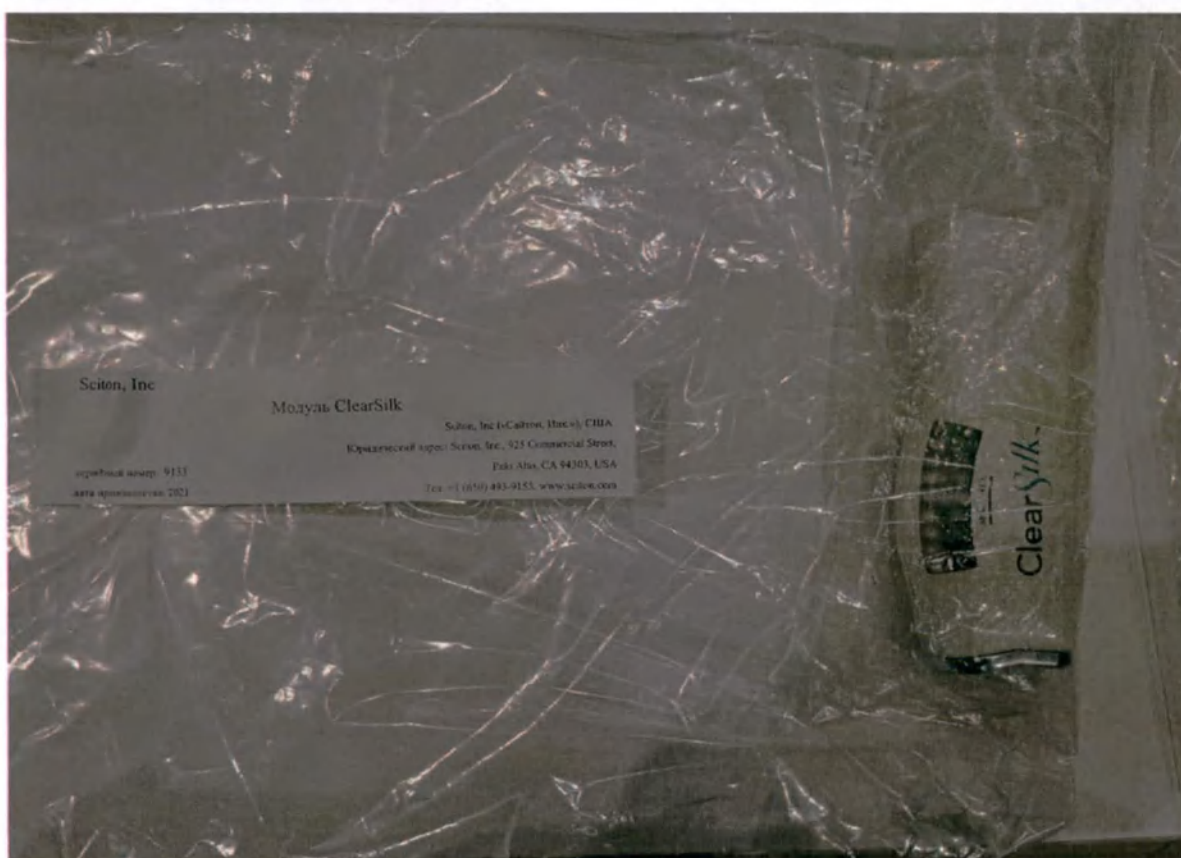



51. Модуль ClearSilk – 1 шт.

Сканер ClearSilk. Используется с модулем 1064 нм для нагревания сосудов, что способствует сокращению морщин

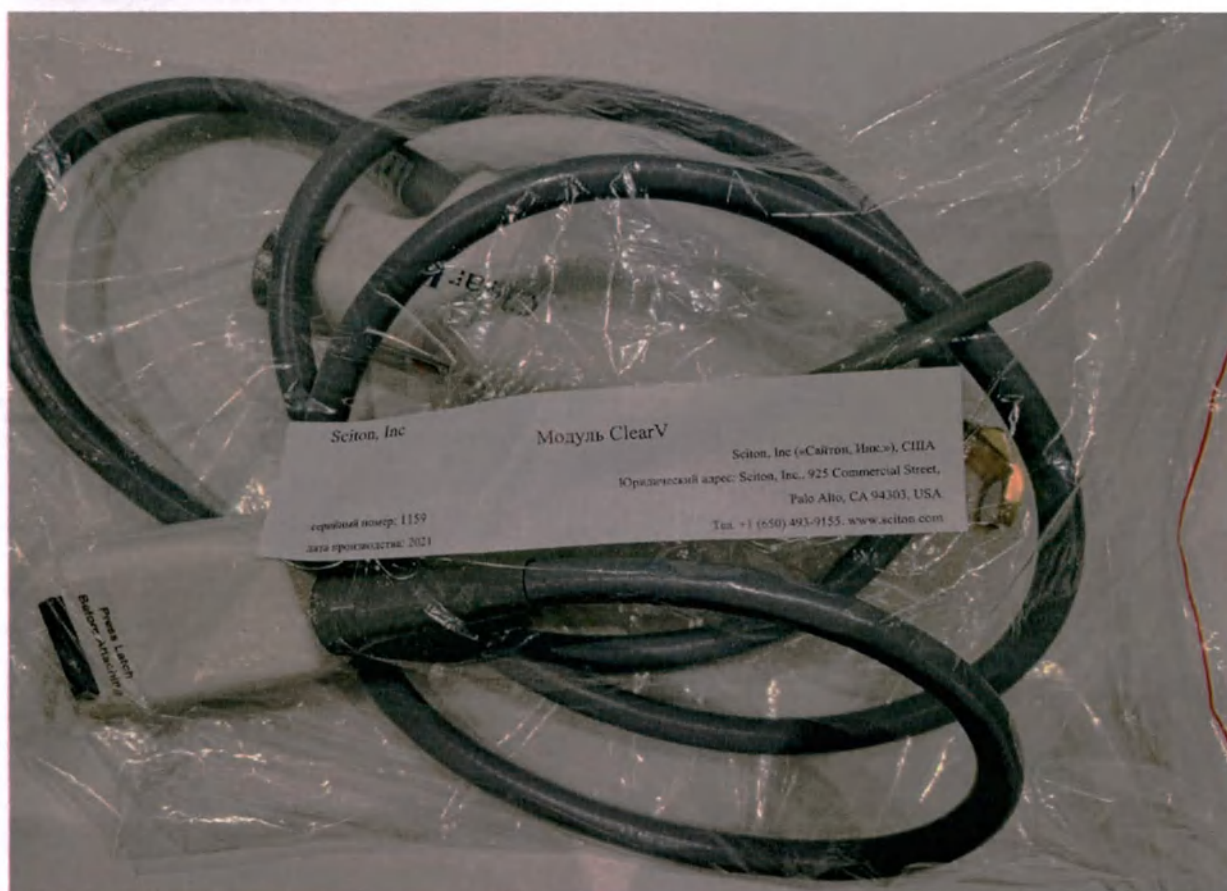


52. Модуль ClearV – 1 шт.

Сканер ClearV используется для лечения разных сосудистых патологий с модулем 1064 нм

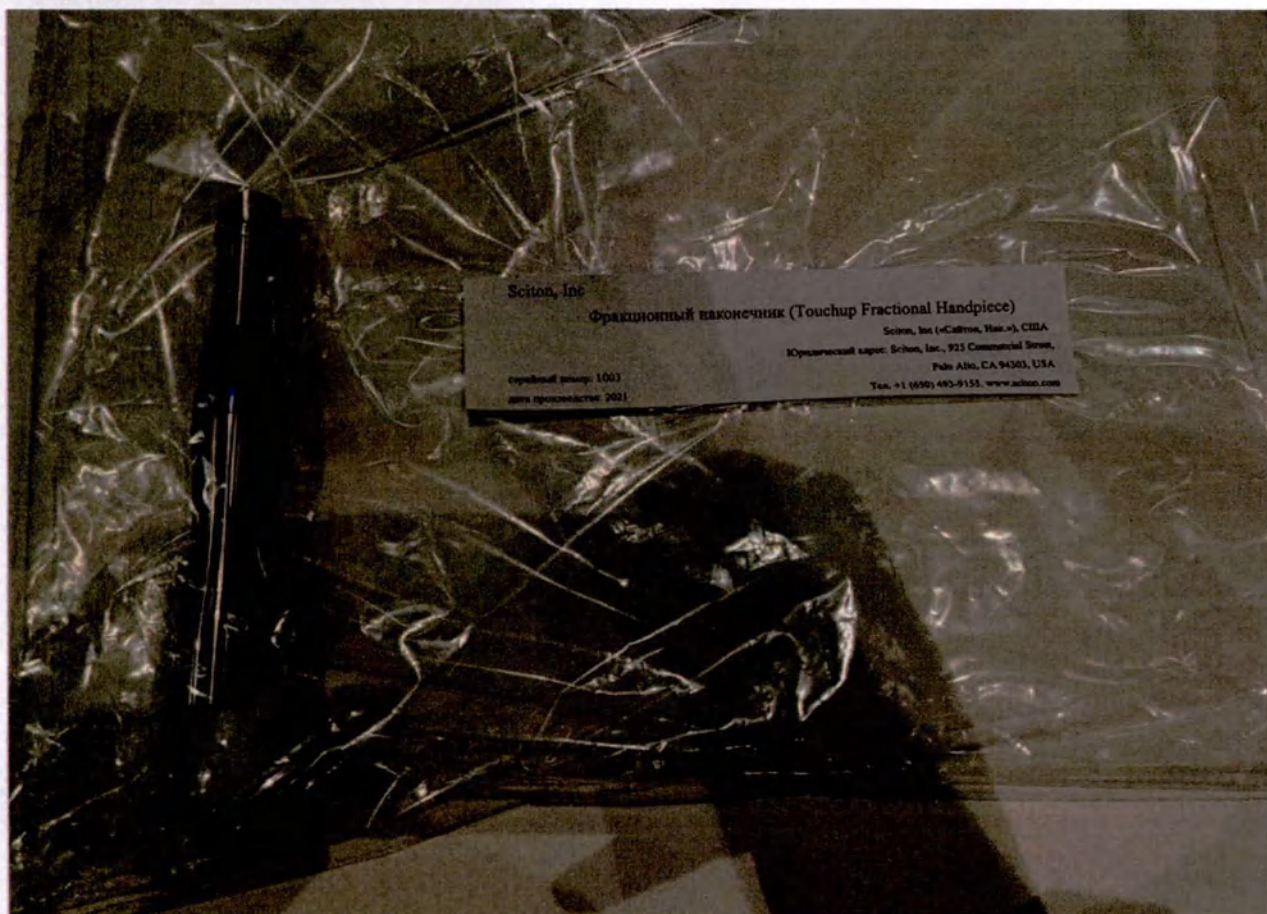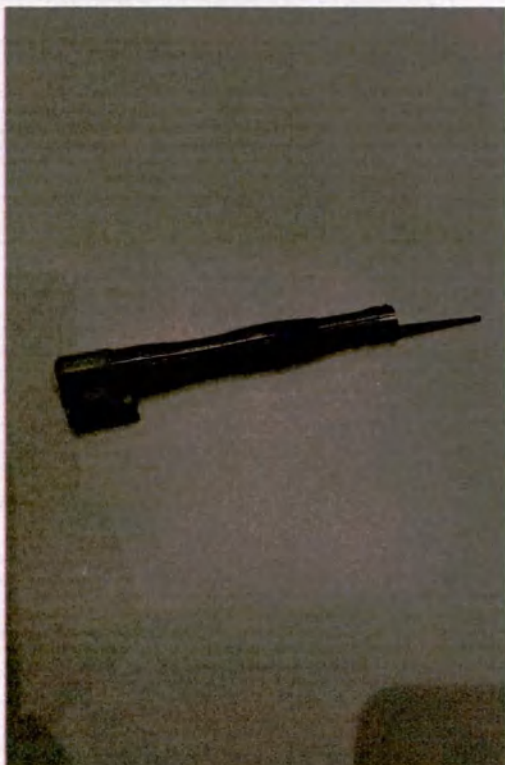


53. Фракционный наконечник (Touchup Fractional Handpiece) – 1 шт.

Наконечник фракционный используется с модулем 2940 нм для точечного фототермолиза

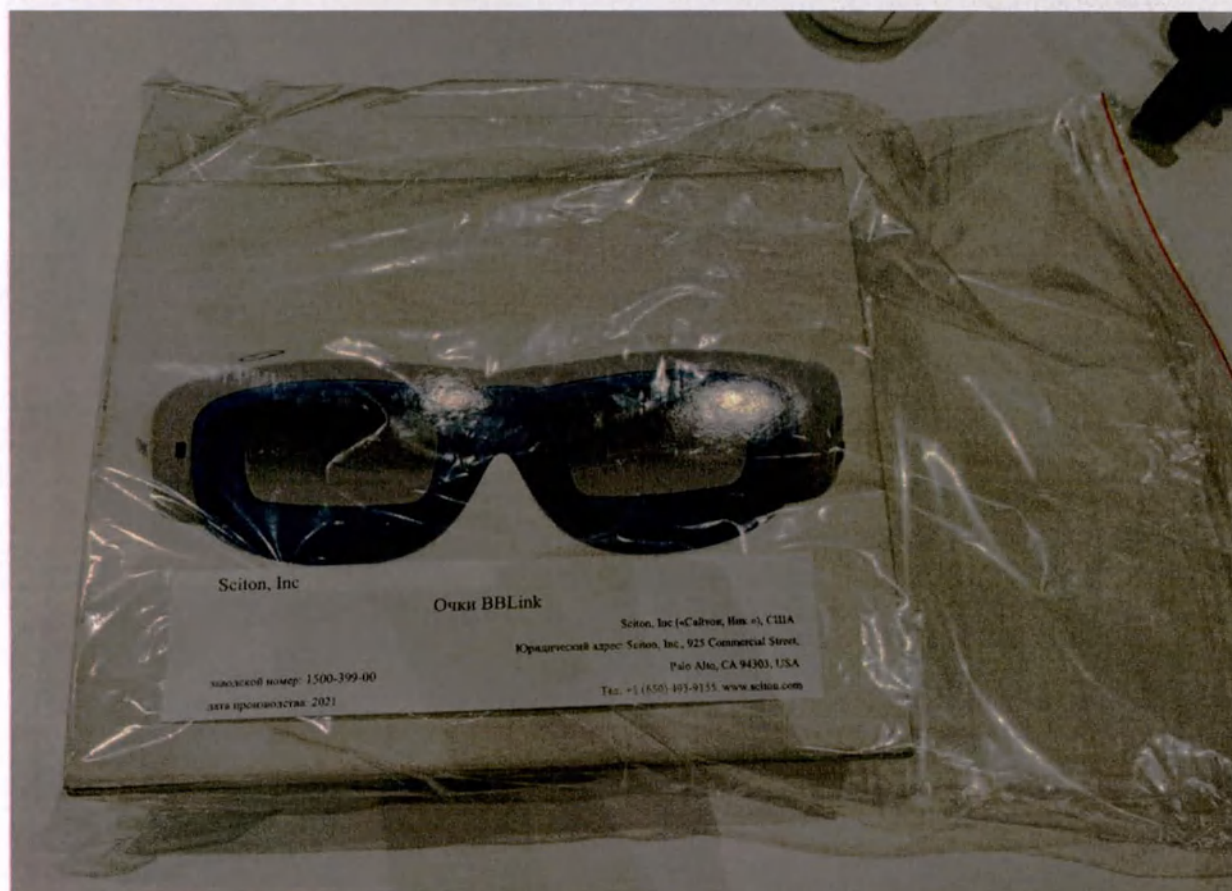


54. Очки BBLink – 1 шт.

Фотохромные автоматические очки, которые синхронизируются с аппаратом при вспышке пульсирующего света и закрываются непосредственно перед вспышкой, тем самым делая процедуру более комфортной для врача

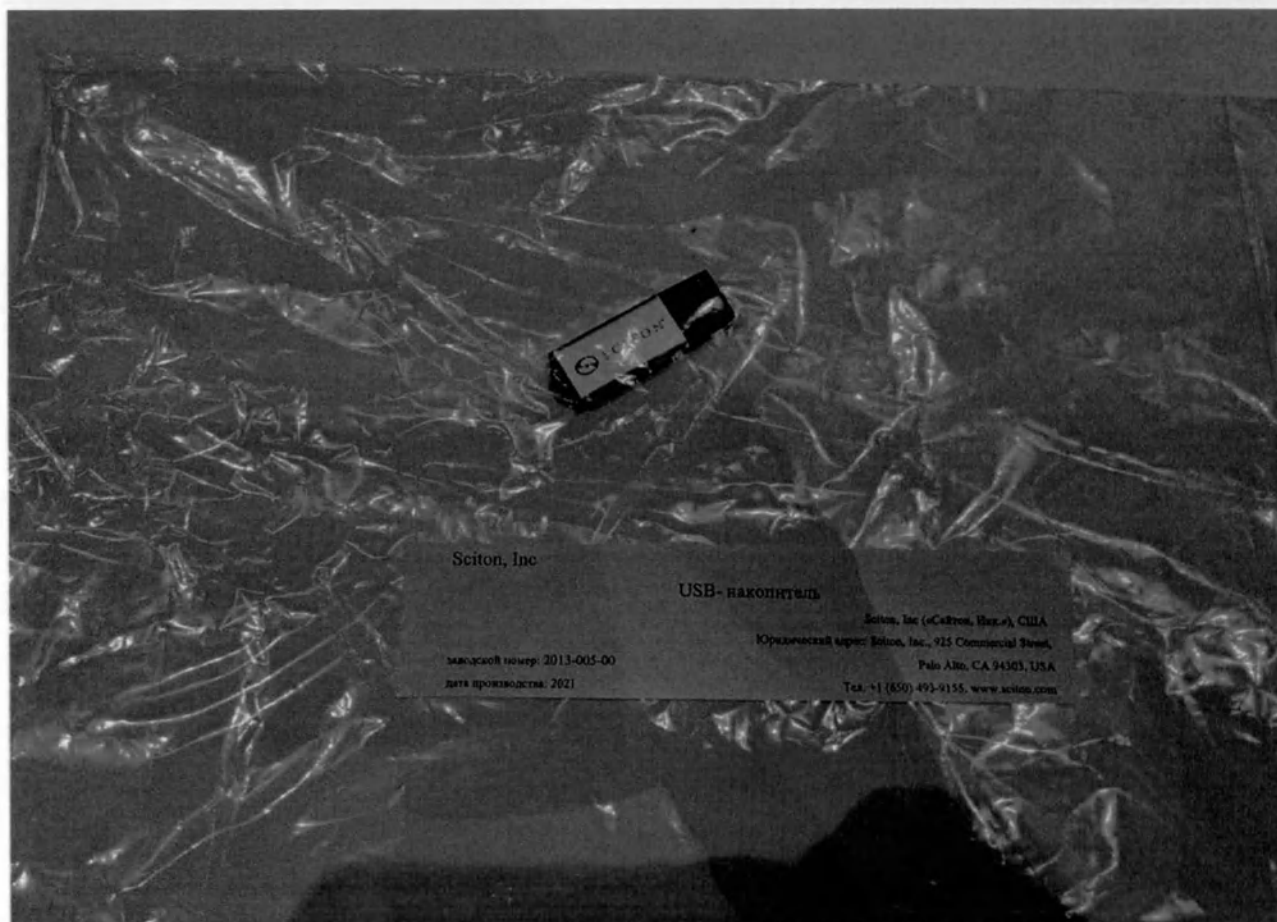

55. USB- накопитель – 1 шт.

USB-носитель с инструкцией и протоколами от производителя

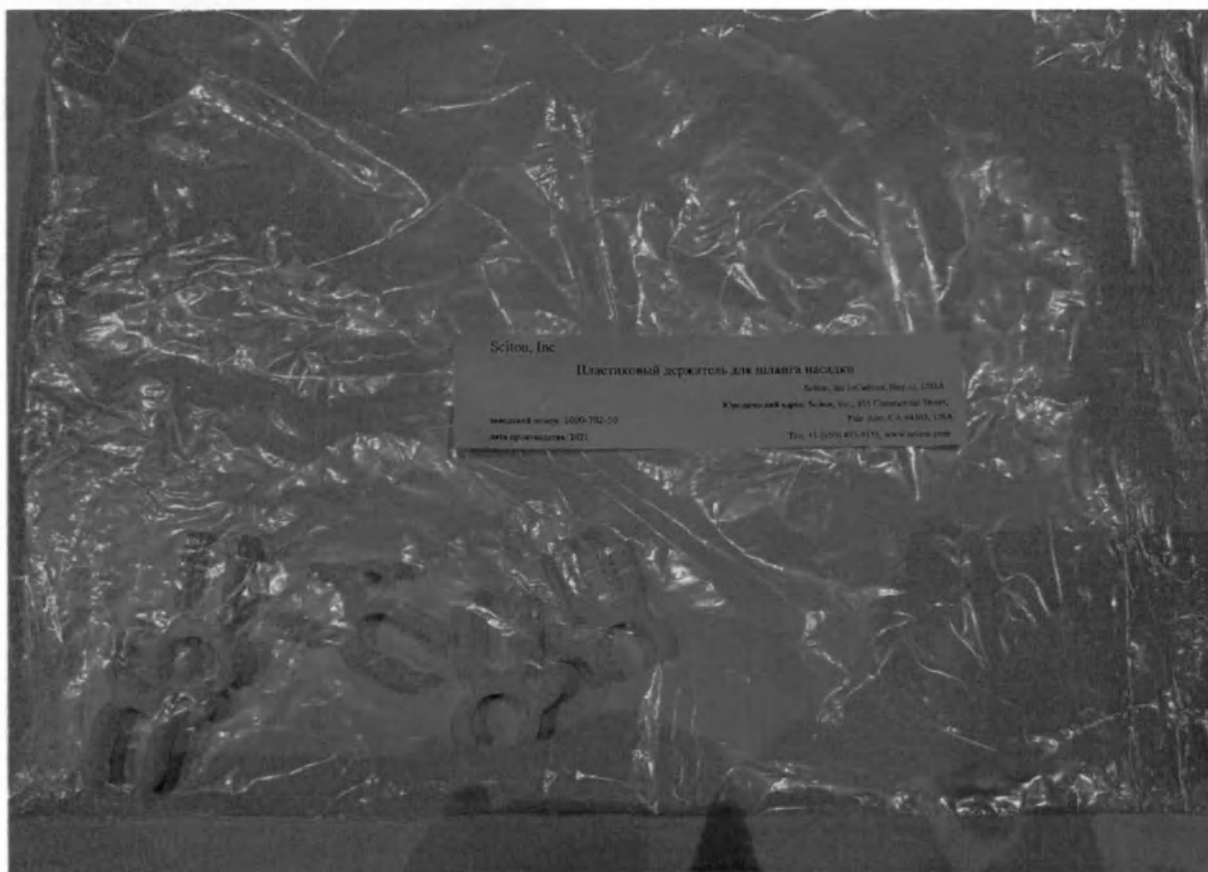

56. Пластиковый держатель для шланга насадки – 5 шт.

Пластиковая клипса на ручку аппарата, чтобы фиксировать шланги охлаждающего и дымоотводящего аппаратов



57. Одинарная проводная ножная педаль – 1 шт.

Проводная педаль для активирования вспышки лазера или пульсирующего света. В защитном металлическом кожухе.



58. Боковые накладки на колеса аппарата, 2 шт.
Пластиковые накладки на шасси аппарата. Левая и правая. Крепятся с помощью
вклеенных неодимовых магнитов

Прошито и пронумеровано 04 листа
Управляющий-индивидуальный
предприниматель ООО «УМА»

Бизянихин Л. С.

