

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会
中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

宁波外办

国家：俄罗斯 归属地：汇金



ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

2024030482-1E A 3.25.10 C

02160446



中国国际贸易促进委员会 中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



号码 No. 243302A0/H01403

兹证明：所附文件的影印件与原件相符。



THIS IS TO CERTIFY THAT: the annexed photostated copy of
DOCUMENT is in conformity with the original.

China Council for the Promotion
of International Trade

签证员:

Authorized
Official: Yang Dixin

日期: 2024年03月25日

(Date: Mar. 25, 2024)

证明网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.

Unit 93, building 12, No.818, Qiming Rd,
Yinzhou, Ningbo, China. 315105

Tel: +86-574-8778 6632

Fax: +86-574-8778 6644

greatcare@greatcare.cn



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор для дренирования ран APXHMED, в вариантах исполнения

Производитель медицинского изделия:

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd. (Нинбо Грейткеа Трейдинг Ко., Лтд.),
Unit 93, Building 12, № 818, Qiming Road, Yinzhou 315105, Ningbo, Zhejiang, China (Блок 93,
корпус 12, №818, Киминг Роуд, Иньчжоу, 315105, Нинбо, Чжэцзян, Китай)

Место производства:

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd., (Нинбо Грейткеа Трейдинг Ко., Лтд.), Unit 93,
Building 12, № 818, Qiming Road, Yinzhou 315105, Ningbo, Zhejiang, China (Блок 93,
корпус 12, №818, Киминг Роуд, Иньчжоу, 315105, Нинбо, Чжэцзян, Китай).

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.,

(Нинбо Грейткеа Трейдинг Ко., Лтд.)

Управляющий директор / Managing director

(должность/position)

Hu Yong Xiang (Ху Юн Сян)

(имя/name)

(подпись/signature)
27/05/2024
«день» месяц / «day» month

СОДЕРЖАНИЕ

1	НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	3
2	НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА.....	18
3	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	18
4	ДАННЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	33
5	УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ.....	35
6	СТЕРИЛИЗАЦИЯ	36
7	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.....	36
8	МАРКИРОВКА.....	54
9	СРОК ГОДНОСТИ	60
10	УТИЛИЗАЦИЯ	60
11	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, НАЗВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НА ПРИНЯТИЕ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА	61

1 НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор для дренирования ран APEXMED, в вариантах исполнения:

1. Набор для дренирования ран STANDART A 400 с трубками дренажными Редона, размер CH/FR: 7, в составе:
 - емкость дренажная, гофрированная, объем 400 мл – 1 шт.;
 - трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
 - трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, размер CH/FR: 7 – 1 шт.;
 - трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 7 – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
2. Набор для дренирования ран STANDART A 400 с трубками дренажными Редона, размер CH/FR: 10, в составе:
 - емкость дренажная, гофрированная, объем 400 мл – 1 шт.;
 - трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
 - трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
 - трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
3. Набор для дренирования ран STANDART A 400 с трубками дренажными Редона, размер CH/FR: 12, в составе:
 - емкость дренажная, гофрированная, объем 400 мл – 1 шт.;
 - трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
 - трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, размер CH/FR: 12 – 1 шт.;
 - трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12 – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
4. Набор для дренирования ран STANDART A 400 с трубками дренажными Редона, размер CH/FR: 14, в составе:
 - емкость дренажная, гофрированная, объем 400 мл – 1 шт.;
 - трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
 - трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, размер CH/FR: 14 – 1 шт.;
 - трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 14 – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
5. Набор для дренирования ран STANDART A 400 с трубками дренажными Редона, размер CH/FR: 16, в составе:
 - емкость дренажная, гофрированная, объем 400 мл – 1 шт.;
 - трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
 - трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, размер CH/FR: 16 – 1 шт.;
 - трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 16 – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
6. Набор для дренирования ран STANDART A 400 с трубками дренажными Редона, размер CH/FR: 18, в составе:
 - емкость дренажная, гофрированная, объем 400 мл – 1 шт.;
 - трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
 - трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, размер CH/FR: 18 – 1 шт.;

- трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 18 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

7. Набор для дренирования ран STANDART В 500 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 7, в составе:

- емкость дренажная, гофрированная с пружиной, объем 500 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

8. Набор для дренирования ран STANDART В 500 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 10, в составе:

- емкость дренажная, гофрированная с пружиной, объем 500 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

9. Набор для дренирования ран STANDART В 500 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 12, в составе:

- емкость дренажная, гофрированная с пружиной, объем 500 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

10. Набор для дренирования ран STANDART В 500 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 14, в составе:

- емкость дренажная, гофрированная с пружиной, объем 500 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 14 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

11. Набор для дренирования ран STANDART В 500 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 15, в составе:

- емкость дренажная, гофрированная с пружиной, объем 500 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 15 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

12. Набор для дренирования ран STANDART В 500 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 16, в составе:

- емкость дренажная, гофрированная с пружиной, объем 500 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 16 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

13. Набор для дренирования ран STANDART В 500 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 18, в составе:

- емкость дренажная, гофрированная с пружиной, объем 500 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 18 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

14. Набор для дренирования ран STANDART B 500 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 19, в составе:

- емкость дренажная, гофрированная с пружиной, объем 500 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 19 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

15. Набор для дренирования ран STANDART C 200 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 7, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

16. Набор для дренирования ран STANDART C 200 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 10, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

17. Набор для дренирования ран STANDART C 200 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 12, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

18. Набор для дренирования ран STANDART C 200 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 14, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 14 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

19. Набор для дренирования ран STANDART C 200 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 16, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 16 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

20. Набор для дренирования ран STANDART С 200 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 18, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 18 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

21. Набор для дренирования ран STANDART С 200 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 19, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 19 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

22. Набор для дренирования ран STANDART С 400 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 7, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

23. Набор для дренирования ран STANDART С 400 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 10, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

24. Набор для дренирования ран STANDART С 400 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 12, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

25. Набор для дренирования ран STANDART С 400 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 14, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 14 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

26. Набор для дренирования ран STANDART С 400 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 16, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 16 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;

– индивидуальная упаковка – 1 шт.

27. Набор для дренирования ран STANDART С 400 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 18, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 18 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

28. Набор для дренирования ран STANDART С 400 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 19, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 19 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

29. Набор для дренирования ран STANDART С 800 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 7, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 800 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

30. Набор для дренирования ран STANDART С 800 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 10, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 800 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

31. Набор для дренирования ран STANDART С 800 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 12, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 800 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

32. Набор для дренирования ран STANDART С 800 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 14, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 800 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 14 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

33. Набор для дренирования ран STANDART С 800 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 16, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 800 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;

- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 16 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

34. Набор для дренирования ран STANDART C 800 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 18, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 800 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 18 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

35. Набор для дренирования ран STANDART C 800 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 19, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 800 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 19 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

36. Набор для дренирования ран STANDART S 50 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 7, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 50 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

37. Набор для дренирования ран STANDART S 50 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 50 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

38. Набор для дренирования ран STANDART S 50 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 50 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

39. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- коннектор, размер: XS – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

40. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;

- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12 – 1 шт.;
- коннектор, размер: XS – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

41. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 14, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 14 – 1 шт.;
- коннектор, размер: S – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

42. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 16, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 16 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

43. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 18, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 18 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

44. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 20, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 20 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

45. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 22, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 22 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

46. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 24, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 24 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

47. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- коннектор, размер: XS – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

48. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12 – 1 шт.;
- коннектор, размер: XS – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

49. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 14, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 14 – 1 шт.;
- коннектор, размер: S – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

50. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 16, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 16 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

51. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 18, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 18 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

52. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 20, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 20 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

53. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 22, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 22 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

54. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 24, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 24 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

55. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- коннектор, размер: XS – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

56. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12 – 1 шт.;
- коннектор, размер: XS – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

57. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 14, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 14 – 1 шт.;
- коннектор, размер: S – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

58. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 16, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 16 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

59. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 18, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 18 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

60. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 20, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 20 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

61. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 22, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 22 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

62. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 24, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 24 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

63. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 10, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- коннектор, размер: XS – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

64. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 15, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 15 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

65. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 19, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 19 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;

– индивидуальная упаковка – 1 шт.

66. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 24, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 24 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

67. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 28, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 28 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

68. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 10, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- коннектор, размер: XS – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

69. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 15, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 15 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

70. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 19, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 19 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

71. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 24, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 24 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

72. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 28, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 28 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;

– индивидуальная упаковка – 1 шт.

73. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 10, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- коннектор, размер: XS – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

74. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 15, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 15 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

75. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 19, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 19 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

76. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 24, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 24 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

77. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 28, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 28 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

78. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с перфорацией, со стилетом, размер 7 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом, размер мм: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

79. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с перфорацией, со стилетом, размер 10 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом, размер мм: 10 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

80. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с перфорацией, со стилетом, размер 7 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом, размер мм: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

81. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с перфорацией, со стилетом, размер 10 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом, размер мм: 10 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

82. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с перфорацией, со стилетом, размер 7 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом, размер мм: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

83. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с перфорацией, со стилетом, размер 10 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом, размер мм: 10 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

84. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами по всей длине, со стилетом, размер 7 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, со стилетом, размер мм: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

85. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами по всей длине, со стилетом, размер 10 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, со стилетом, размер мм: 10 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

86. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами по всей длине, со стилетом, размер 7 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, со стилетом, размер мм: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

87. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами по всей длине, со стилетом, размер 10 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, со стилетом, размер мм: 10 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

88. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами по всей длине, со стилетом, размер 7 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, со стилетом, размер мм: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

89. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами по всей длине, со стилетом, размер 10 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

90. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер 7 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер мм: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

91. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер 10 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер мм: 10 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

92. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер 7 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер мм: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

93. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер 10 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер мм: 10 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

94. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер 7 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер мм: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

95. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер 10 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер мм: 10 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

96. Набор для дренирования ран Spring-Vac 150 в составе:

- емкость дренажная, плоская с пружиной, объем 150 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с Y-образным коннектором и зажимом – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

97. Набор для дренирования ран Spring-Vac 200, в составе:

- емкость дренажная, плоская с пружиной, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с Y-образным коннектором и зажимом – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

98. Набор для дренирования ран Spring-Vac 300, в составе:

- емкость дренажная, плоская с пружиной, объем 300 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с Y-образным коннектором и зажимом – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

99. Набор для дренирования ран Spring-Vac 400, в составе:

- емкость дренажная, плоская с пружиной, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с Y-образным коннектором и зажимом – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

100. Набор для дренирования ран Spring-Vac 450, в составе:

- емкость дренажная, плоская с пружиной, объем 450 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с Y-образным коннектором и зажимом – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

101. Набор для дренирования ран High Pressure 400, в составе:

- емкость дренажная высокого разрежения, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

102. Набор для дренирования ран High Pressure 600, в составе:

- емкость дренажная высокого разрежения, объем 600 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

103. Набор для дренирования ран High Pressure 1000, в составе:

- емкость дренажная высокого разрежения, объем 1000 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

2 НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА

Производитель:

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.,

(Нинбо Грейткае Трейдинг Ко., Лтд.);

Unit 93, Building 12, № 818, Qiming Road, Yinzhou 315105, Ningbo, Zhejiang, China

(Блок 93, корпус 12, №818, Киминг Роуд, Иньчжоу, 315105, Нинбо, Чжэцзян, Китай);

Место производства:

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.,

(Нинбо Грейткае Трейдинг Ко., Лтд.)

Unit 93, Building 12, № 818, Qiming Road, Yinzhou 315105, Ningbo, Zhejiang, China

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

1. Набор для дренирования ран STANDART A 400 с трубками дренажными Редона, размер CH/FR: 7, в составе:

- емкость дренажная, гофрированная, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, размер CH/FR: 7 – 1 шт.;
- трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

2. Набор для дренирования ран STANDART A 400 с трубками дренажными Редона, размер CH/FR: 10, в составе:

- емкость дренажная, гофрированная, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

3. Набор для дренирования ран STANDART A 400 с трубками дренажными Редона, размер CH/FR: 12, в составе:

- емкость дренажная, гофрированная, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, размер CH/FR: 12 – 1 шт.;
- трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

4. Набор для дренирования ран STANDART A 400 с трубками дренажными Редона, размер CH/FR: 14, в составе:
- емкость дренажная, гофрированная, объем 400 мл – 1 шт.;
 - трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
 - трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, размер CH/FR: 14 – 1 шт.;
 - трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 14 – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
5. Набор для дренирования ран STANDART A 400 с трубками дренажными Редона, размер CH/FR: 16, в составе:
- емкость дренажная, гофрированная, объем 400 мл – 1 шт.;
 - трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
 - трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, размер CH/FR: 16 – 1 шт.;
 - трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 16 – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
6. Набор для дренирования ран STANDART A 400 с трубками дренажными Редона, размер CH/FR: 18, в составе:
- емкость дренажная, гофрированная, объем 400 мл – 1 шт.;
 - трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
 - трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, размер CH/FR: 18 – 1 шт.;
 - трубка дренажная Редона, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 18 – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
7. Набор для дренирования ран STANDART B 500 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 7, в составе:
- емкость дренажная, гофрированная с пружиной, объем 500 мл – 1 шт.;
 - трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
 - трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 7 – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
8. Набор для дренирования ран STANDART B 500 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 10, в составе:
- емкость дренажная, гофрированная с пружиной, объем 500 мл – 1 шт.;
 - трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
 - трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
9. Набор для дренирования ран STANDART B 500 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 12, в составе:
- емкость дренажная, гофрированная с пружиной, объем 500 мл – 1 шт.;
 - трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
 - трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12 – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
10. Набор для дренирования ран STANDART B 500 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 14, в составе:
- емкость дренажная, гофрированная с пружиной, объем 500 мл – 1 шт.;

- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 14 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

11. Набор для дренирования ран STANDART В 500 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 15, в составе:

- емкость дренажная, гофрированная с пружиной, объем 500 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 15 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

12. Набор для дренирования ран STANDART В 500 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 16, в составе:

- емкость дренажная, гофрированная с пружиной, объем 500 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 16 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

13. Набор для дренирования ран STANDART В 500 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 18, в составе:

- емкость дренажная, гофрированная с пружиной, объем 500 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 18 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

14. Набор для дренирования ран STANDART В 500 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 19, в составе:

- емкость дренажная, гофрированная с пружиной, объем 500 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 19 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

15. Набор для дренирования ран STANDART С 200 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 7, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

16. Набор для дренирования ран STANDART С 200 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 10, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

17. Набор для дренирования ран STANDART C 200 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 12, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

18. Набор для дренирования ран STANDART C 200 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 14, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 14 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

19. Набор для дренирования ран STANDART C 200 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 16, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 16 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

20. Набор для дренирования ран STANDART C 200 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 18, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 18 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

21. Набор для дренирования ран STANDART C 200 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 19, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 19 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

22. Набор для дренирования ран STANDART C 400 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 7, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

23. Набор для дренирования ран STANDART C 400 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 10, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;

– индивидуальная упаковка – 1 шт.

24. Набор для дренирования ран STANDART С 400 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 12, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

25. Набор для дренирования ран STANDART С 400 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 14, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 14 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

26. Набор для дренирования ран STANDART С 400 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 16, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 16 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

27. Набор для дренирования ран STANDART С 400 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 18, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 18 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

28. Набор для дренирования ран STANDART С 400 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 19, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 19 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

29. Набор для дренирования ран STANDART С 800 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 7, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 800 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

30. Набор для дренирования ран STANDART С 800 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 10, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 800 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;

- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

31. Набор для дренирования ран STANDART C 800 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 12, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 800 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

32. Набор для дренирования ран STANDART C 800 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 14, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 800 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 14 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

33. Набор для дренирования ран STANDART C 800 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 16, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 800 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 16 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

34. Набор для дренирования ран STANDART C 800 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 18, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 800 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 18 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

35. Набор для дренирования ран STANDART C 800 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом, размер CH/FR: 19, в составе:

- емкость дренажная с системой пружин, объем 800 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- трубка дренажная, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 19 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

36. Набор для дренирования ран STANDART S 50 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 7, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 50 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

37. Набор для дренирования ран STANDART S 50 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 50 мл – 1 шт.;

- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

38. Набор для дренирования ран STANDART S 50 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 50 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

39. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- коннектор, размер: XS – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

40. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12 – 1 шт.;
- коннектор, размер: XS – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

41. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 14, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 14 – 1 шт.;
- коннектор, размер: S – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

42. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 16, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 16 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

43. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 18, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 18 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

44. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 20, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 20 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

45. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 22, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 22 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

46. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 24, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 24 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

47. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- коннектор, размер: XS – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

48. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12 – 1 шт.;
- коннектор, размер: XS – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

49. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 14, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 14 – 1 шт.;
- коннектор, размер: S – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

50. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 16, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 16 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

51. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 18, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 18 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

52. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 20, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 20 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

53. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 22, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 22 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

54. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 24, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 24 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

55. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- коннектор, размер: XS – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

56. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;

- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 12 – 1 шт.;
- коннектор, размер: XS – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

57. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 14, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 14 – 1 шт.;
- коннектор, размер: S – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

58. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 16, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 16 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

59. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 18, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 18 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

60. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 20, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 20 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

61. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 22, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 22 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

62. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 24, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией, со стилетом, размер CH/FR: 24 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

63. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 10, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- коннектор, размер: XS – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

64. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 15, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 15 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

65. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 19, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 19 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

66. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 24, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 24 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

67. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 28, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 28 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

68. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 10, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- коннектор, размер: XS – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

69. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 15, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 15 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;

– индивидуальная упаковка – 1 шт.

70. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 19, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 19 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

71. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 24, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 24 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

72. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 28, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 28 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

73. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 10, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- коннектор, размер: XS – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

74. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 15, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 15 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

75. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 19, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 19 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

76. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 24, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 24 – 1 шт.;
- коннектор, размер: L – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

77. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 28, в составе:
- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
 - трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами, со стилетом, размер CH/FR: 28 – 1 шт.;
 - коннектор, размер: L – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
78. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с перфорацией, со стилетом, размер 7 мм, в составе:
- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
 - трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом, размер мм: 7 – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
79. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с перфорацией, со стилетом, размер 10 мм, в составе:
- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
 - трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом, размер мм: 10 – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
80. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с перфорацией, со стилетом, размер 7 мм, в составе:
- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
 - трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом, размер мм: 7 – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
81. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с перфорацией, со стилетом, размер 10 мм, в составе:
- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
 - трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом, размер мм: 10 – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
82. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с перфорацией, со стилетом, размер 7 мм, в составе:
- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
 - трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом, размер мм: 7 – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
83. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с перфорацией, со стилетом, размер 10 мм, в составе:
- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
 - трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией, со стилетом, размер мм: 10 – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
84. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами по всей длине, со стилетом, размер 7 мм, в составе:
- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;

- трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, со стилетом, размер мм: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

85. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами по всей длине, со стилетом, размер 10 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, со стилетом, размер мм: 10 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

86. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами по всей длине, со стилетом, размер 7 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, со стилетом, размер мм: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

87. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами по всей длине, со стилетом, размер 10 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, со стилетом, размер мм: 10 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

88. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами по всей длине, со стилетом, размер 7 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, со стилетом, размер мм: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

89. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами по всей длине, со стилетом, размер 10 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине, со стилетом, размер CH/FR: 10 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

90. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер 7 мм, в составе:

- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
- трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер мм: 7 – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

91. Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер 10 мм, в составе:
- емкость дренажная, силиконовая, объем 100 мл – 1 шт.;
 - трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер мм: 10 – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
92. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер 7 мм, в составе:
- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
 - трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер мм: 7 – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
93. Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер 10 мм, в составе:
- емкость дренажная, силиконовая, объем 200 мл – 1 шт.;
 - трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер мм: 10 – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
94. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер 7 мм, в составе:
- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
 - трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер мм: 7 – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
95. Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер 10 мм, в составе:
- емкость дренажная, силиконовая, объем 400 мл – 1 шт.;
 - трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на 3/4 длины, со стилетом, размер мм: 10 – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
96. Набор для дренирования ран Spring-Vac 150 в составе:
- емкость дренажная, плоская с пружиной, объем 150 мл – 1 шт.;
 - трубка соединительная с Y-образным коннектором и зажимом – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
97. Набор для дренирования ран Spring-Vac 200, в составе:
- емкость дренажная, плоская с пружиной, объем 200 мл – 1 шт.;
 - трубка соединительная с Y-образным коннектором и зажимом – 1 шт.;
 - инструкция по применению – 1 шт.;
 - индивидуальная упаковка – 1 шт.
98. Набор для дренирования ран Spring-Vac 300, в составе:
- емкость дренажная, плоская с пружиной, объем 300 мл – 1 шт.;

- трубка соединительная с Y-образным коннектором и зажимом – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

99. Набор для дренирования ран Spring-Vac 400, в составе:

- емкость дренажная, плоская с пружиной, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с Y-образным коннектором и зажимом – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

100. Набор для дренирования ран Spring-Vac 450, в составе:

- емкость дренажная, плоская с пружиной, объем 450 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с Y-образным коннектором и зажимом – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

101. Набор для дренирования ран High Pressure 400, в составе:

- емкость дренажная высокого разрежения, объем 400 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

102. Набор для дренирования ран High Pressure 600, в составе:

- емкость дренажная высокого разрежения, объем 600 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

103. Набор для дренирования ран High Pressure 1000, в составе:

- емкость дренажная высокого разрежения, объем 1000 мл – 1 шт.;
- трубка соединительная с коннектором и зажимом – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

4 ДАННЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Назначение.

Набор стерильных инструментов, предназначен для обеспечения беспрепятственного удаления раневого отделяемого, крови, воспалительного экссудата, а также воздуха из полостей организма и области операционного вмешательства. Изделия выпускаются различных размеров и конструкций для использования в разных областях хирургии.

Показания к применению.

- Пневмоторакс;
- Плевральный выпот;
- Хилоторакс;
- Эмпиема: гнойная инфекция плевральной полости.
- Гемоторакс;
- Послеоперационный гидроторакс, напр. после торакотомии, резекции пищевода, кардиохирургической операции.

- Жидкость в плевральной полости;
- Уриноторакс.

Показания для использования дренирования устанавливаются врачом, который и производит введение дренажа больному. Наблюдение за последующим самочувствием больного, состоянием дренажа, качеством и количеством удаляемой жидкости осуществляет младший медицинский персонал, в обязанности которого также входит проверка целостности и правильности размещения дренажной трубки, отсутствие на ней перегибов и сдавливаний.

Противопоказания.

- Геморрагический диатез;
- Инфекция в месте введения;
- Коагулопатия;
- Наличие диафрагмальной грыжи;
- Гидроторакс печени;
- Лёгочные, плевральные или грудные спайки;
- Плохая свёртываемость крови;
- Нерегулируемое повышение давления;
- Пациенты с гиперчувствительностью к используемым материалам.

Возможные побочные действия и осложнения.

При использовании изделия возможны следующие побочные действия:

- Аллергическая реакция на материал изделия;
- Избыточное повреждение тканей вследствие приложения чрезмерных усилий при использовании;
- Инфекции поверхностных и глубоких тканей;
- Закупорка дренажной трубки сгустками крови, омертвевшими тканями или ее перекручивание;
- Смещение трубки, требующее замены;
- Рецидив отека легких;
- Сосудистое повреждение;
- Кровотечение;
- Подкожная гематома или серома;
- Подкожная эмфизема;
- Распространение опухолевых клеток;
- Зияние, которое может привести к грыже брюшной полости;
- Травма легкого;
- Повреждения межреберных нервов;
- Электролитный дисбаланс.

Дренирование пациента и дальнейшее его лечение требует тщательного выполнения всех асептических процедур, так как дренажное отверстие может служить входными воротами для заражения внутригоспитальной инфекцией.

Меры предосторожности при применении.

Для применения только квалифицированным медицинским персоналом.

Выберите правильный размер перед использованием.

Не используйте, если стерильная упаковка вскрыта или повреждена.

Прочитайте все предупреждения и инструкции перед использованием, неправильное применение может привести к серьезной травме.

Не используйте изделие после истечения срока годности.

Изделие предназначено для одноразового применения, не подлежит повторной стерилизации, повторное использование продукта может быть опасно для пациента.

После использования изделия должны приниматься меры предосторожности, утилизация устройства должна производиться в соответствии с действующими национальными инструкциями в отношении биологических опасных отходов.

Область применения.

В лечебно-профилактических учреждениях, приемных отделениях, отделениях общей терапии, онкологии, ортопедической, пластической/реконструктивной хирургии, нейрохирургии, гинекологической, сердечно-сосудистой и общей хирургии, реанимации и инфекционных отделениях квалифицированным медицинским персоналом.

Требования безопасности.

Набор для дренирования ран APXMED – медицинское изделие однократного применения, не подлежит повторному использованию. «Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.» («Нинбо Грейткае Трейдинг Ко., Лтд.»), Китай не несет ответственности за осложнения, которые могут возникнуть в результате многократного или неправильного использования изделия.

Не используйте изделие после истечения срока годности.

Придерживайтесь национальных стандартов при утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей и влаги.

5 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

В лечебно-профилактических учреждениях, приемных отделениях, отделениях общей терапии, онкологии, ортопедической, пластической/реконструктивной хирургии, нейрохирургии, гинекологической, сердечно-сосудистой и общей хирургии, реанимации и инфекционных отделениях квалифицированным медицинским персоналом.

Допускается транспортирование всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортировки:

Температура: от -30 °C до +45 °C.

Относительная влажность воздуха до 95 %.

Атмосферное давление 700 гПа до 1060 гПа.

Хранение изделия осуществляется в закрытых отапливаемых помещениях в следующих климатических условиях:

- Температура хранения: от +5 °C до +35 °C;

- Относительная влажность воздуха: 35-85 %;

- Атмосферное давление: от 500 гПа до 1060 гПа.

Хранение изделия должно осуществляться вдали от нагревательных приборов, в защищенном от солнца месте.

Срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке. Только для одноразового использования. Изделие сохраняет стерильность в течение всего срока годности.

Условия эксплуатации медицинского изделия:

- Температура эксплуатации: от +10°C до + 35°C

- Относительная влажность воздуха: от 20% до 85%

- Атмосферное давление: 700 гПа до 1060 гПа

Применение изделия согласно утвержденным методикам и общепринятой медицинской практике.


6 СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Набор для дренирования ран APExMED - это набор изделий одноразового использования, которые поставляются стерильными. Метод стерилизации – оксидом этилена, повторной стерилизации не подлежат. Срок сохранения стерильности указан на упаковке и составляет 5 лет.

7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Краткое описание медицинского изделия/конструкции медицинского изделия.

Набор для дренирования ран APExMED – это стерильное медицинское изделие, одноразового использования, предназначенное для проведения процедуры дренирования. Трубка дренажная, входящая в состав набора для дренирования ран используется вместе с закрытой дренажной системой, которая подает отрицательное давление через дренажный просвет. На конце трубки соединительной имеется универсальный коннектор (ступенчатого типа), с помощью которого емкость герметично соединяется с трубками дренажными разных диаметров, обеспечивая эффективную аспирацию.

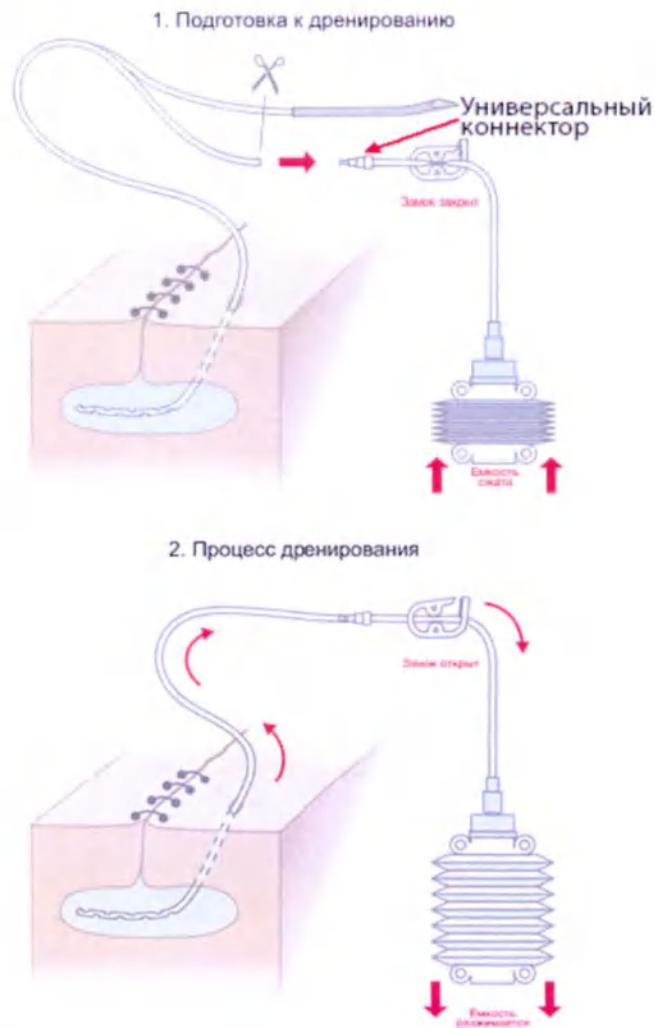

Емкости дренажные выполненные из силикона на крышке имеют несколько разъемов для соединения с трубками дренажными.

Под действием давления жидкость из раны скапливается в емкость дренажную для сбора жидкости. Помимо трубки дренажной и емкости для сбора жидкости дренажные наборы могут включать в себя одноразовые устройства для установки дренажа, например, острый металлический стилет, коннекторы.

Сроки дренирования и нахождения трубки в ране или полости, зависят от характера хирургического вмешательства и физиологических особенностей пациента, они устанавливаются лечащим врачом индивидуально, согласно утвержденным методикам и общепринятой медицинской практике.

1. Набор для дренирования ран STANDART A 400 с трубками дренажными Редона, в составе:

Набор для дренирования ран STANDART A 400 с емкостью дренажной, гофрированной предназначен для дренирования области оперативного вмешательства в тех случаях, когда в послеоперационном периоде прогнозируется значительное или умеренное количество выделяемых биологических жидкостей.

Трубки дренажные Редона, входящие в состав набора, применяются для активного и пассивного дренирования. По всей длине трубок расположена рентгенконтрастная линия, различающаяся по цветам. На одном конце одной из трубок присутствует стальной стилет, плавный переход которого минимизирует травмирование тканей и органов. Стиллет имеет на своем конце защитный колпачок, который защищает острие и предотвращает его загрязнение. Пирамидальная заточка стилета делает процедуру менее травматичной и болезненной, снижая период послеоперационного восстановления. Выполнение прокола с помощью стилета изнутри раны для установки дренажа обеспечивает асептичность при манипуляциях. На другом конце - трубка покрыта перфорацией, благодаря которой можно максимально полно и легко удалять экссудат. Важной особенностью является наличие отметки, позволяющей безошибочно расположить трубку дренажную в ране. В комплекте имеется две трубки дренажных Редона со стилетом и без.

Емкость дренажная выполнена из полиэтилена в виде «гармошки», используется для низковакуумного дренирования, для эвакуации раневого содержимого. Необходимое давление внутри системы создается путем сжатия руками «гармошки». Емкость имеет подвес ребристой структуры с двумя отверстиями, с помощью которых варьируется пространственный размер и емкость может фиксироваться на разных поверхностях. Соединительная трубка с коннектором и зажимом обеспечивает герметичное соединение между трубкой дренажной и дренажной емкостью, объемом 400 мл.

Характеристики:

- Емкость дренажная из полиэтилена объемом 400 мл;
- Подвес ребристой структуры с двумя отверстиями;
- В наборе две трубки дренажные Редона с рентгенконтрастной линией, имеющие цветовую размерную кодировку;
- Стальной стилет изогнутой формы, позволяющий минимизировать травмирование тканей и органов;
- Соединительная трубка с коннектором ступенчатого типа на конце;
- Изделие предназначено для однократного применения;
- Стерилизован этиленоксидом.

2. Набор для дренирования ран STANDART В 500 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом

Набор для дренирования ран STANDART В 500 с емкостью дренажной, гофрированной с пружиной предназначен для дренирования области оперативного вмешательства в тех случаях, когда в послеоперационном периоде прогнозируется значительное или умеренное количество выделяемых биологических жидкостей.

Набор включает в себя дренажную емкость типа «гармошка» из поливинилхлорида объемом 500 мл, внутри которой по всей длине расположена упругая пружина из нержавеющей стали для более равномерного низковакуумного дренажа. Емкость снабжена соединительной трубкой из поливинилхлорида, на конце которой расположен Y-образный коннектор. Трубка дренажная снабжена перфорацией, с помощью которой легко удаляется лишняя биологическая жидкость. Для удобства расположения в ране трубка имеет маркировочные отметки глубины введения, с двух сторон от перфораций на расстоянии 5 см. С другой стороны трубки дренажной - стальной стилет обтекаемой формы, позволяющий минимизировать травмирование тканей и органов при установке

трубки. Стиллет имеет на своем конце защитный колпачок, который защищает острие и предотвращает его загрязнение. Пирамидальная заточка стилета делает процедуру менее травматичной и болезненной, снижая период послеоперационного восстановления.

Характеристики:

- Емкость дренажная из поливинилхлорида объемом 500 мл;
- По всей длине емкости расположена пружина из нержавеющей стали для создания большего разряжения;
- Трубка дренажная с рентгенконтрастной линией и метками глубины введения;
- Стальной стиллет изогнутой формы, позволяющий минимизировать травмирование тканей и органов;
- Трубка соединительная с Y-образным коннектором на конце, с возможностью присоединения второй трубки дренажной;
- Изделие предназначено для однократного применения;
- Стерилизован этиленоксидом.

3. Набор для дренирования ран STANDART C 200 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART C 400 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART C 800 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом.

Набор для дренирования ран STANDART C 200, 400 или 800 с емкостью дренажной с системой пружин предназначен для дренирования области оперативного вмешательства в тех случаях, когда в послеоперационном периоде прогнозируется значительное или умеренное количество выделяемых биологических жидкостей.

Набор для дренирования ран с емкостью дренажной с системой пружин имеет в своем составе емкость дренажную, оснащенную пружинным механизмом, для создания высокого разряжения. Емкость представлена в трех вариантах исполнения 200, 400 и 800 мл. Боковые стенки емкости прозрачные, что позволит следить за объемом и характером выделяемого экссудата. Дренажная емкость оснащена портом для подсоединения дренажной трубки с антивозвратным клапаном, препятствующим обратному рефлюксу отделяемой жидкости. Трубка дренажная, соединенная с острозаточенным стальным стилетом, имеет множественные перфорации, рентгенконтрастную линию по всей длине трубки, а также метки глубины введения трубки дренажной на расстоянии 5 см от перфорированной части с двух сторон, помогающие безошибочно расположить трубку дренажную в операционной ране. Наличие соединительной трубки с Y-образным коннектором дает возможность "двойного" дренирования одной трубкой дренажной, подсоединения двух трубок дренажных, либо соединения с источником вакуума. Емкость снабжена "юбкой" и зажимом для крепления к операционному белью.

Характеристики:

- Емкость дренажная из полиэтилена объемом 200, 400 или 800 мл снабжена системой пружин для создания большего разряжения;
- Емкость дренажная имеет антивозвратный клапан, предотвращающий обратный рефлюкс;

- Прозрачные стенки с градуировкой для возможности визуализации качества и количества содержимого резервуара;
- Трубка дренажная с рентгенконтрастной линией и метками глубины введения;
- Стальной стилет изогнутой формы, позволяющий минимизировать травмирование тканей и органов;
- Трубка соединительная с Y-образным коннектором на конце, с возможностью присоединения второй трубки дренажной;
- Изделие предназначено для однократного применения;
- Стерилизован этиленоксидом.

4. Набор для дренирования ран STANDART S 50 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с перфорацией, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с перфорацией, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с перфорацией, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами по всей длине, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами по всей длине, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами по всей длине, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами на 3/4 длины, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами на 3/4 длины, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами на 3/4 длины

Набор для дренирования ран STANDART S 100, 200 или 400 с емкостью силиконовой представлен удобной низковакуумной дренажной системой, имеющей несколько вариантов исполнения в зависимости от вида трубки дренажной и объема емкости дренажной.

Емкость дренажная в виде «груши» выполнена из силикона и представлена в четырех вариантах 50, 100, 200, 400 мл. Разрежение создается за счет расправления эластичных стенок емкости. Прозрачность стенок емкости и градуировка объема позволяют точно оценивать количество и визуальные характеристики дренажного отделяемого. На верхней крышке емкости имеется 3 разъема для соединения с трубками дренажными различного диаметра. Емкость дренажная снабжена антивозвратным клапаном, позволяющим избежать рефлюкса содержимого дренажа в момент очистки резервуара. Дренажный порт позволяет удалить содержимое емкости дренажной, не разъединяя системы.

Помимо емкости дренажной набор для дренирования ран STANDART S комплектуется трубкой дренажной, представленной в пяти различных вариантах (в зависимости от варианта исполнения набора).

Трубка дренажная силиконовая, круглая с пазами со стилетом имеет 4 непрерывных канала, которые значительно увеличивают площадь контакта с окружающими тканями. Обладают повышенной прочностью и гибкостью, обеспечивая эффективный отток жидкости, даже при сильном скручивании. Трубка дренажная оснащена стилетом, имеет отметку для удобства расположения в ране на расстоянии 5 см до пазов. По всей длине катетера расположена рентгеноконтрастная линия.

Трубка дренажная силиконовая, круглая с перфорацией со стилетом представляет собой на одной стороне перфорированную часть, на другой стороне-круглую трубку, соединенную со стилетом. Трубка дренажная этого вида имеет три кольцевые отметки для успешной локализации в ране. Отметки находятся на расстоянии 5-6-7 см от перфорированного участка трубки. По всей длине трубки дренажной расположена рентгеноконтрастная линия.

Трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами по всей длине со стилетом и трубка дренажная силиконовая, плоская с пазами на $\frac{3}{4}$ длины со стилетом представляют собой рентгеноконтрастную плоскую силиконовую трубку (рабочая часть), соединенную с круглой удлинительной трубкой (проводящая часть) и стилетом. Специальная ребристая внутренняя структура и гладкая поверхность трубки предотвращает ее слипание и окклюзию.

Трубка дренажная силиконовая, плоская с перфорацией со стилетом состоит из двух частей, плавно соединенных между собой. Одна часть перфорирована полностью и представляет собой плоскую трубку (рабочая часть) из рентгеноконтрастного вещества – сульфата бария и силикона. Также рабочая часть трубки оснащена зубцами, которые служат для предотвращения слипания и окклюзии, количество которых варьируется от размера трубки (7 мм – 2 зубца; 10 мм – 3 зубца). Вторая часть трубки дренажной представляет собой круглую прозрачную трубку (проводящая часть), которая соединяется со стилетом. Благодаря своему строению трубка дренажная не врастает в ткани и может быть использована для длительного дренирования послеоперационных ран.

Характеристики:

- Дренажная емкость выполнена из силикона объемом 50, 100, 200 или 400 мл;
- Рентгеноконтрастная линия на круглой трубке дренажной и рентгеноконтрастное вещество в составе плоской трубки дренажной позволяют определить положение трубки в ране;

- Стальной стилет изогнутой формы, позволяющий минимизировать травмирование тканей и органов;
- Метка для безопасного и точного расположения трубки дренажной в операционной ране;
- Разновидность трубок дренажных, представленная в четырех вариациях;
- Три разъема для соединения с трубками дренажными различного диаметра;
- Невозвратный клапан, предотвращающий обратный захват жидкости;
- Изделие предназначено для однократного применения;
- Стерилизован этиленоксидом.

**5. Набор для дренирования ран Spring-Vac 150;
Набор для дренирования ран Spring-Vac 200;
Набор для дренирования ран Spring-Vac 300;
Набор для дренирования ран Spring-Vac 400;
Набор для дренирования ран Spring-Vac 450.**

Набор для дренирования ран Spring-Vac с емкостью дренажной, плоской с пружиной на 150, 200, 300, 400 или 450 мл обеспечивает эффективное низковакуумное дренирование, значительно уменьшает риск инфицирования и способствует неосложненному заживлению раны в короткий срок. Антивозвратный клапан, которым снабжен плоский резервуар предотвращает обратный ход отделяемого. Градуировка объема на боковой стороне резервуара позволяет точно оценивать объем экссудата.

Характеристики:

- Дренажная емкость выполнена из прочного ПВХ, объемом 150, 200, 300, 400 и 450 мл.
- Емкость имеет плоскую форму в нерабочем состоянии, обеспечивая компактное хранение.
- Прозрачные стенки емкости и градуировка объема дают возможность точно оценивать количество и визуальные характеристики экссудата.
- Разрежение в емкости создается за счет расправления стенок и пружины из нержавеющей стали, расположенной по всей длине емкости.
- Соединительная трубка с Y-образным коннектором подходит для герметичного соединения до двух катетеров разного диаметра.
- Невозвратный клапан, предотвращает обратный захват жидкости;
- Сливной порт позволяет удалить содержимое емкости, не разъединяя системы.
- Изделие предназначено для однократного применения;
- Стерилизован этиленоксидом.

**6. Набор для дренирования ран High Pressure 400;
Набор для дренирования ран High Pressure 600;
Набор для дренирования ран High Pressure 1000.**

Набор для дренирования ран High Pressure предназначен для дренирования ран и полостей различной локализации с помощью предустановленного вакуумного разрежения.

Набор состоит из емкости дренажной высокого разрежения и трубки соединительной с коннектором и зажимом.

Емкость дренажная из ПВХ с предустановленным вакуумом представлена в трех вариантах исполнения 400, 600 и 1000 мл. Разрежение создается за счет расправления эластичных стенок емкости. Прозрачность стенок емкости, и градуировка объема позволяют точно оценивать количество и визуальные характеристики дренажного отделяемого. Емкости имеют шкалу для определения объема эксудата.

Индикатор уровня вакуума позволяет отслеживать уровень вакуума в емкости. Емкость дренажная снабжена антивозвратным клапаном, позволяющим избежать рефлюкса содержимого дренажа в момент очистки резервуара. Дренажный порт позволяет удалить содержимое емкости дренажной, не разъединяя системы.

Характеристики:

- Емкость из ПВХ с предустановленным вакуумом (отрицательное давление 85 кПа);
- Индикатор вакуума в виде «гармошки»;
- Рельефная градуировка объема;
- Соединительная трубка с универсальным коннектором;
- Градуировка емкости дренажной от 50 мл до 400 и 600 мл с ценой деления 10 мл и от 50 мл до 1000 мл с ценой деления 25 мл;
- Изделие предназначено для однократного применения;
- Стерилизован этиленоксидом.

Внешний вид МИ представлен на рисунках ниже.






Рисунок 1
Набор для дренирования ран STANDART А 400 с трубками дренажными Редона

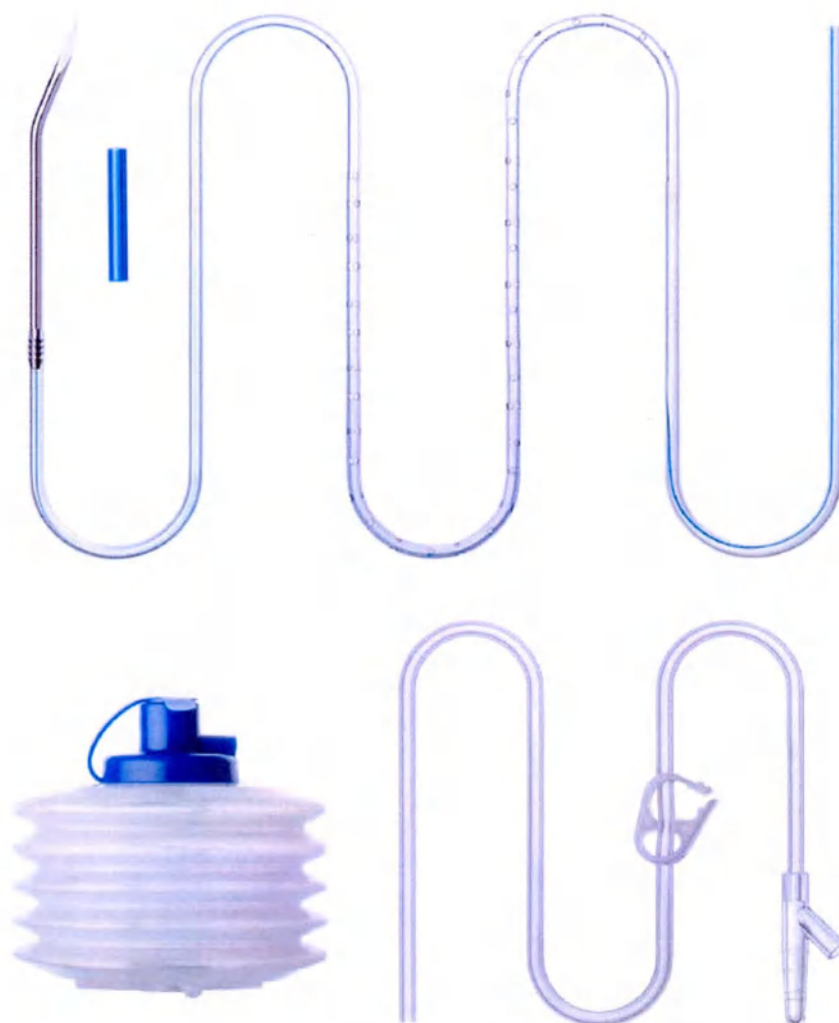


Рисунок 2

Набор для дренирования ран STANDART В 500 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом

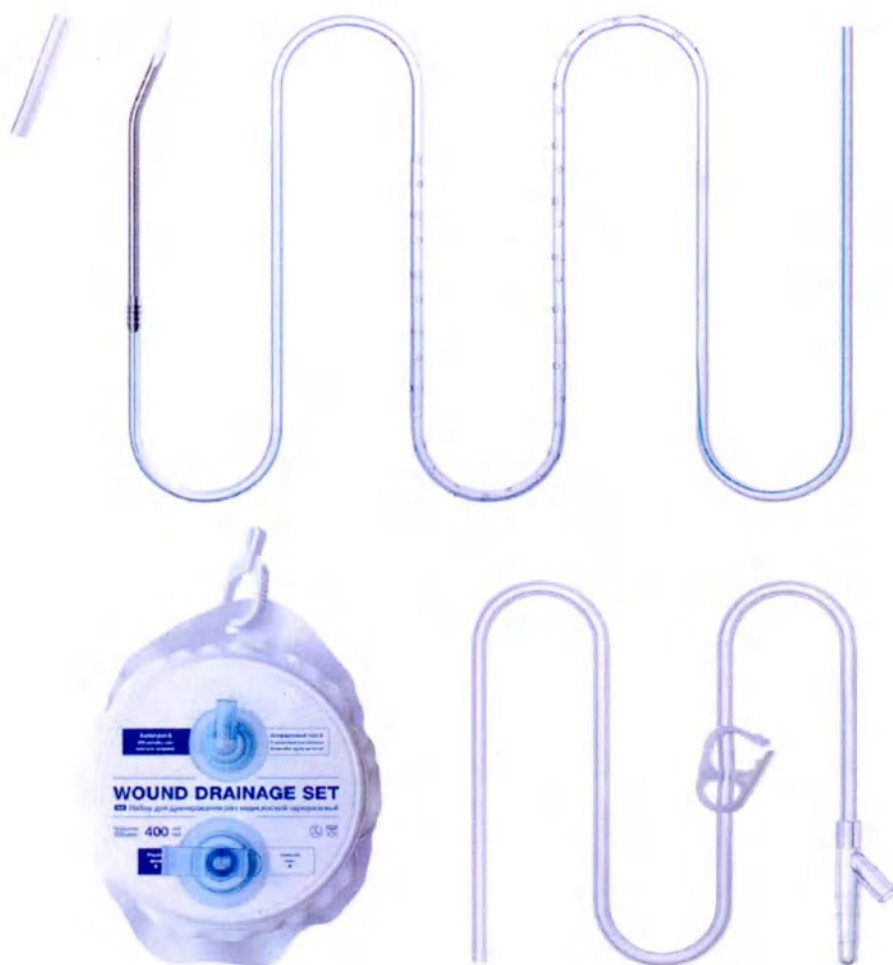


Рисунок 3

Набор для дренирования ран STANDART С 200 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART С 400 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART С 800 с трубкой дренажной, круглой с перфорацией со стилетом.

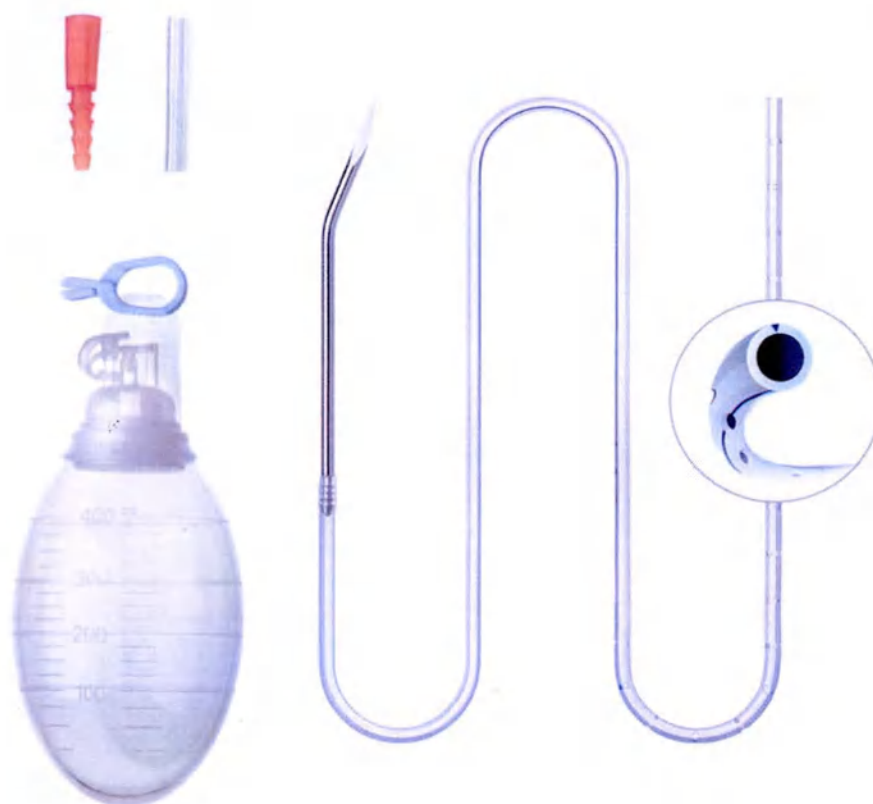


Рисунок 4

Набор для дренирования ран STANDART S 50 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с перфорацией, со стилетом.



Рисунок 5

Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, круглой с пазами, со стилетом.

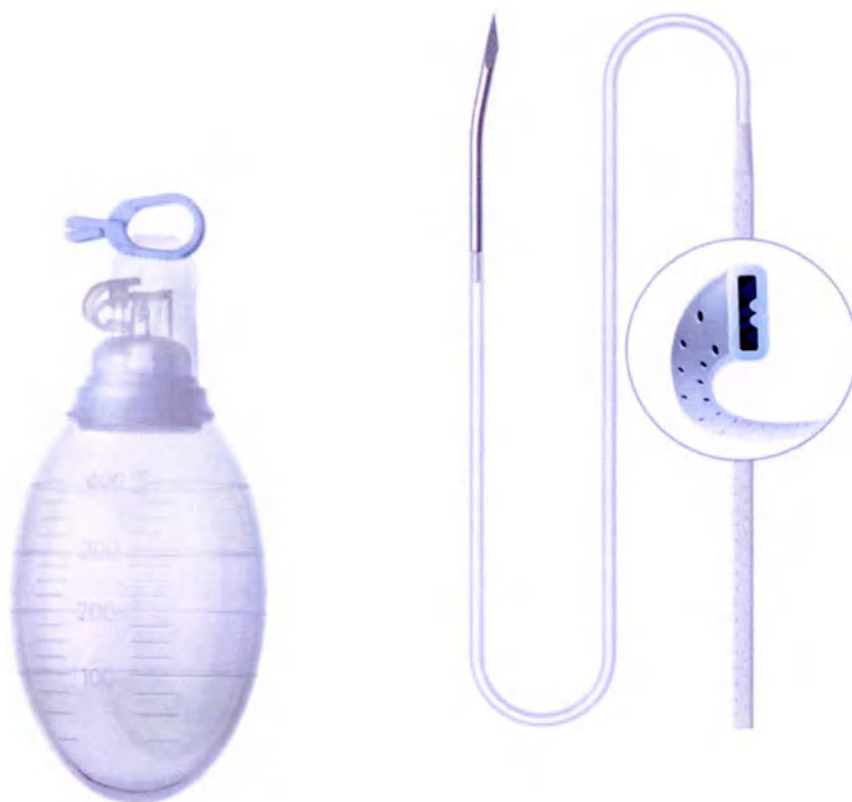


Рисунок 6

Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с перфорацией, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с перфорацией, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с перфорацией, со стилетом.

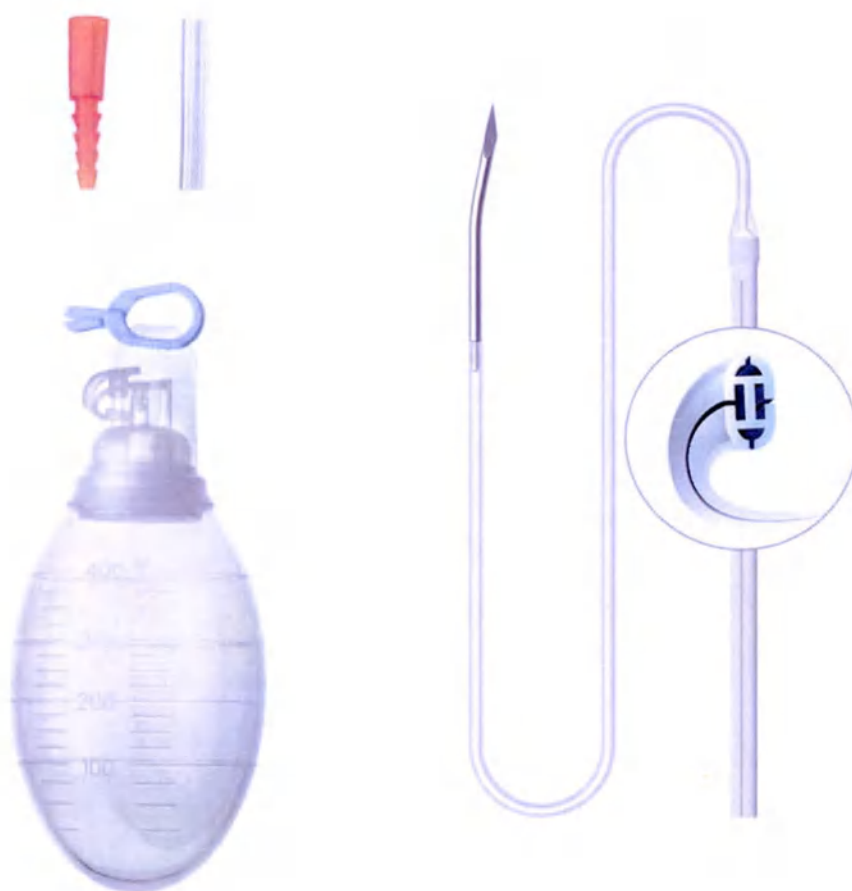


Рисунок 7

Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами по всей длине, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами по всей длине, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами по всей длине, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 100 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами на 3/4 длины, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 200 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами на 3/4 длины, со стилетом;

Набор для дренирования ран STANDART S 400 с трубкой дренажной силиконовой, плоской с пазами на 3/4 длины, со стилетом.

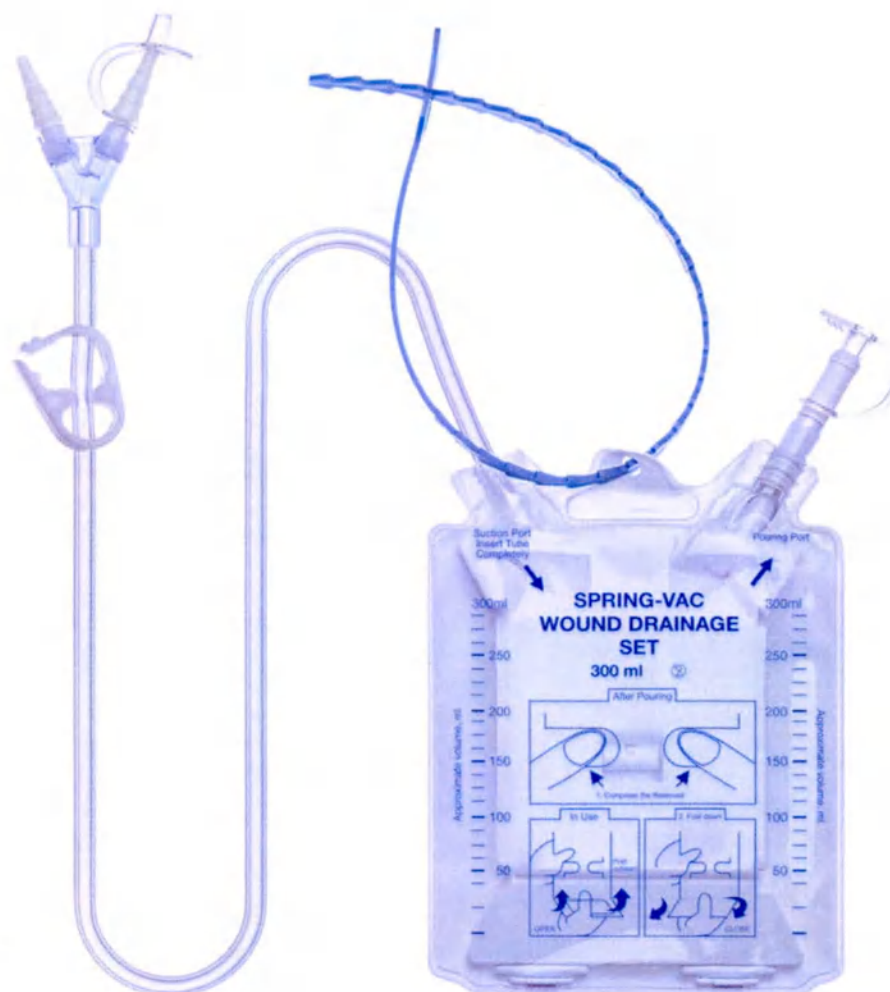


Рисунок 8

Набор для дренирования ран Spring-Vac 150;
 Набор для дренирования ран Spring-Vac 200;
 Набор для дренирования ран Spring-Vac 300;
 Набор для дренирования ран Spring-Vac 400;
 Набор для дренирования ран Spring-Vac 450.

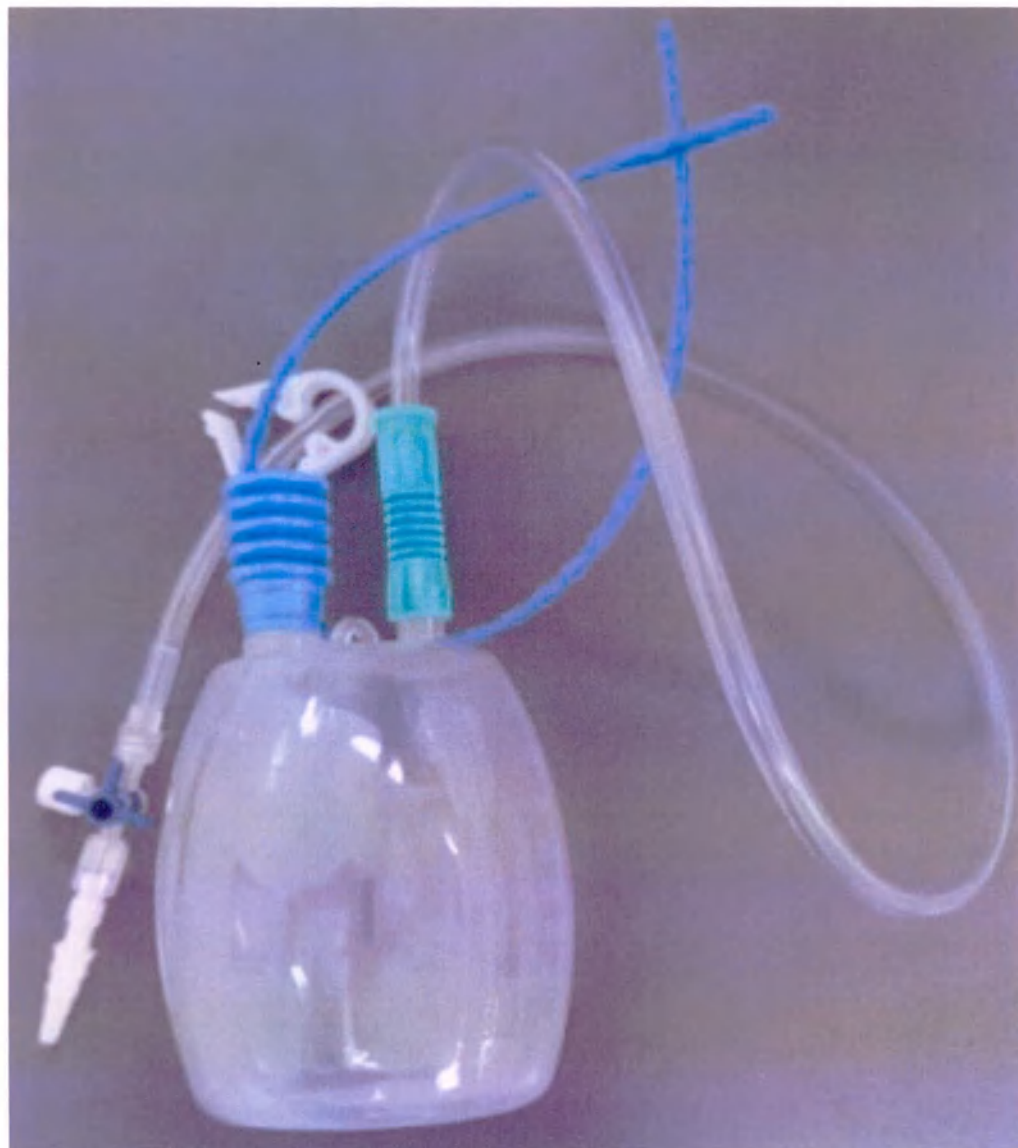


Рисунок 9
 Набор для дренирования ран High Pressure 400;
 Набор для дренирования ран High Pressure 600;
 Набор для дренирования ран High Pressure 1000.

Порядок работы

Набор для дренирования ран STANDART

- Проверьте срок годности набора для дренирования ран и его упаковку на целостность и отсутствие следов повреждения;
- Используя асептические методы, осторожно вскройте защитную упаковку и извлеките набор для дренирования ран;
- В случае наборов для дренирования ран STANDART S с трубками дренажными из силикона, дополнительно вскройте защитную упаковку и извлеките трубку дренажную из пластиковой упаковки;

- При необходимости отмерьте и отрежьте трубку дренажную, сделав ее необходимой длины в соответствии с размером раны;
- Поместите трубку дренажную в место сбора жидкости подходящим способом, например с помощью стилета;
- Закрепите трубку дренажную утвержденными методами;
- При необходимости используйте рентгенологический контроль, чтобы убедиться, что дренаж установлен корректно и дренирование будет происходить правильно;
- Плотнo соедините трубку дренажную с трубкой соединительной посредством коннектора, предварительно убедившись, что зажим трубки соединительной закрыт. Если в конфигурацию вашего набора не входит трубка соединительная, то пропустите этот этап;
- Сожмите емкость дренажную обеими руками и подсоедините соединительную трубку (свободным концом) к сжатой емкости. В случае наборов для дренирования ран STANDART S с силиконовой емкостью дренажной, соедините трубку дренажную непосредственно с самой емкостью используя разъем подходящего диаметра, находящийся на крышке емкости;
- Начните процедуру дренирования, отпустив зажим на трубке соединительной, чтобы активировать всасывание.
- Отсоедините емкость дренажную и слейте жидкость из емкости. При необходимости повторите предыдущие шаги.
- По завершении процедуры дренирования снимите дренажную систему.
- Утилизируйте изделие, его компоненты и упаковку в соответствии с установленными правилами

Набор для дренирования ран Spring-Vac

- Проверьте срок годности набора для дренирования ран и его упаковку на целостность и отсутствие следов повреждения;
- Используя асептические методы, осторожно вскройте защитную упаковку и извлеките набор для дренирования ран;
- Вскройте защитную упаковку и извлеките трубку дренажную (трубка дренажная не входит в стандартный комплект поставки данного набора);
- При необходимости отмерьте и отрежьте трубку дренажную необходимой длины в соответствии с размером раны;
- Поместите трубку дренажную в место сбора жидкости подходящим способом, например с помощью стилета;
- Закрепите трубку дренажную утвержденными методами;
- При необходимости используйте рентгенологический контроль, чтобы убедиться, что дренаж установлен корректно и дренирование будет происходить правильно;
- Плотнo соедините трубку дренажную с трубкой соединительной посредством коннектора на ее конце, предварительно убедившись, что зажим трубки соединительной закрыт;
- Начните процедуру дренирования путем надавливания пальцами в обозначенной области на лицевой стороне емкости дренажной;
- Используйте зажим на трубке соединительной, чтобы отрегулировать поток экссудата.
- По завершении процедуры дренирования закройте зажим и аккуратно отсоедините емкость дренажную.
- Слейте жидкость из емкости и снимите дренажную систему.
- Утилизируйте изделие, его компоненты и упаковку в соответствии с установленными правилами

Набор для дренирования ран High Pressure

- Проверьте срок годности набора для дренирования ран и его упаковку на целостность и отсутствие следов повреждения;
- Используя асептические методы, осторожно вскройте защитную упаковку и извлеките набор для дренирования ран;
- Дополнительно проверьте индикатор вакуума на емкости высокого разряжения, он должен быть полностью сжат;
- Вскройте защитную упаковку и извлеките трубку дренажную (трубка дренажная не входит в стандартный комплект поставки данного набора);
- Поместите трубку дренажную в место сбора жидкости подходящим способом, например с помощью стилета;
- Закрепите трубку дренажную утвержденными методами;
- При необходимости используйте рентгенологический контроль, чтобы убедиться, что дренаж установлен корректно и дренирование будет происходить правильно;
- Плотно соедините трубку дренажную с трубкой соединительной посредством коннектора на ее конце, предварительно убедившись, что зажим трубки соединительной закрыт;
- Плотно подсоедините трубку соединительную к емкости дренажной;
- Начните процедуру дренирования последовательно открыв зажимы сначала на трубке соединительной, а затем на емкости дренажной, чтобы активировать всасывание.
- По завершении процедуры дренирования закройте зажимы и аккуратно отсоедините емкость дренажную, отсоединив трубку соединительную.
- Слейте жидкость из емкости и снимите дренажную систему.
- Утилизируйте изделие, его компоненты и упаковку в соответствии с установленными правилами

Способ (метод) применения

Изделие должно применяться только квалифицированным медицинским персоналом в условиях ЛПУ.

Средства и методы дезинфекции и очистки

Данное изделие является одноразовым, дезинфекции и очистке не подлежит.

Информация о потенциальных потребителях медицинского изделия

Набор для дренирования ран APEXMED предназначен для применения квалифицированным медицинским персоналом (медработником) в условиях медицинских учреждений.

8 МАРКИРОВКА

Символы, встречающиеся на индивидуальной упаковке (этикетке) МИ - Набор для дренирования ран APEXMED, в вариантах исполнения:

На индивидуальную упаковку медицинского изделия нанесена следующая информация:

- Наименование медицинского изделия;
- Наименование и адрес изготовителя;
- Дата изготовления;
- Номер партии;
- Номер по каталогу;
- Дата истечения срока годности;

- Состав набора;
- Размер трубки;
- Размер емкости дренажной;
- «Обратитесь к инструкции по применению»;
- Сведения о стерильности и методе стерилизации;
- «Запрет на повторное применение»;
- «Не стерилизовать повторно»;
- «Нетоксично»;
- «Не использовать при повреждении упаковки»;
- «Беречь от влаги»;
- «Не допускать воздействия солнечного света»;
- «Утилизация по установленным правилам»;
- «Температурный диапазон»;
- «Знак добровольной сертификации»;
- Дата и номер РУ.
- Информация об уполномоченном представителе:
 ООО "Алексмед Рус"
 ул. Электрозаводская д.24, стр. 1, ком. 606.

Таблица 1. Символы, присутствующие на индивидуальной упаковке изделия медицинского – Набор для дренирования ран APEXMED, в вариантах исполнения:

Символ	Наименование символа
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Код партии
	Номер по каталогу
	Использовать до
	Обратитесь к инструкции по применению
	Стерилизация оксидом этилена
	Запрет на повторное применение
	Не стерилизовать повторно

	
NON TOXIC	Не токсично
	Не использовать при повреждении упаковки
	Беречь от влаги
	Не допускать воздействия солнечного света
	Не использовать при повреждении упаковки
	Утилизация устройства по установленным правилам
	Температурный диапазон
	Знак добровольной сертификации

Символы, встречающиеся на групповой упаковке (этикетке) медицинского изделия
– Набор для дренирования ран APExMED, в вариантах исполнения:

На групповую упаковку медицинского изделия нанесена следующая информация:

- Наименование медицинского изделия;
- Наименование и адрес изготовителя;
- Размер трубки;
- Размер емкости дренажной;
- Количество;
- Дата изготовления;
- Номер партии;
- Номер по каталогу;
- Дата истечения срока годности;
- «Обратитесь к инструкции по применению»;
- Сведения о стерильности и методе стерилизации;
- «Запрет на повторное применение»;

- «Не стерилизовать повторно»;
- «Нетоксично»;
- «Беречь от влаги»;
- «Не допускать воздействия солнечного света»;
- «Утилизация по установленным правилам»;
- «Температурный диапазон»;
- «Знак добровольной сертификации»;
- Дата и номер РУ;
- Информация об уполномоченном представителе:
ООО "Апексмед Рус"
ул. Электrozаводская д.24, стр. 1, ком. 606.
107023, Москва, Россия, www.apexmed.ru

Таблица 2. Символы, присутствующие на групповой упаковке изделия медицинского – Набор для дренирования ран APEXMED, в вариантах исполнения:

Символ	Наименование символа
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Код партии
	Номер по каталогу
	Использовать до
	Обратитесь к инструкции по применению
	Стерилизация оксидом этилена
	Запрет на повторное применение
	Не стерилизовать повторно
NON TOXIC	Не токсично

	Хрупкое, обращаться осторожно
	Беречь от влаги
	Не допускать воздействия солнечного света
	Температурный диапазон
	Знак добровольной сертификации

Символы, встречающиеся на транспортной упаковке (этикетке) медицинского изделия – Набор для дренирования ран АРЕХMED, в вариантах исполнения:

На транспортную упаковку медицинского изделия нанесена следующая информация:

- Наименование медицинского изделия;
- Наименование и адрес изготовителя;
- Размер трубки;
- Размер емкости дренажной;
- Количество;
- Дата изготовления;
- Номер партии;
- Номер по каталогу;
- Дата истечения срока годности;
- «Обратитесь к инструкции по применению»;
- Сведения о стерильности и методе стерилизации;
- «Запрет на повторное применение»;
- «Не стерилизовать повторно»;
- «Нетоксично»;
- «Хрупкое, обращаться осторожно»
- «Беречь от влаги»;
- «Не допускать воздействия солнечного света»;
- «Вверх»
- «Температурный диапазон»;
- «Знак добровольной сертификации»;
- Дата и номер РУ.

Таблица 3. Символы, присутствующие на транспортной упаковке изделия медицинского – Набор для дренирования ран АРЕХMED, в вариантах исполнения:

Символ	Наименование символа
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Код партии
	Номер по каталогу
	Использовать до
	Обратитесь к инструкции по применению
	Стерилизация оксидом этилена
	Запрет на повторное применение
	Не стерилизовать повторно
	Не токсично
	Не использовать при повреждении упаковки
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Беречь от влаги
	Не допускать воздействия солнечного света

	Верх
	Температурный диапазон
	Знак добровольной сертификации

9 СРОК ГОДНОСТИ

Хранение изделия осуществляется в закрытых отапливаемых помещениях в следующих климатических условиях:

- Температура хранения: от +5 °С до +35 °С;
- Относительная влажность воздуха: 35-85 %;
- Атмосферное давление: от 500 гПа до 1060 гПа.

Хранение изделия должно осуществляться вдали от нагревательных приборов, в защищенном от солнца месте.

Срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке. Только для одноразового использования. Изделие сохраняет стерильность в течение всего срока годности.

10 УТИЛИЗАЦИЯ

В условиях стационара, склада и т.п., при необходимости, медицинское изделие утилизируют и уничтожают в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами, регламентируемые СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Использованные изделия должны быть утилизированы в соответствии с требованиями к утилизации медицинских отходов. Класс опасности медицинских отходов исходя из характеристик морфологического состава – класс Б (эпидемиологически опасные отходы).

При истечении срока годности и/или нарушения целостности герметичной упаковки изделие относится к классу А и утилизируется как эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенных к твердым бытовым отходам, в соответствии с правилами, действующими в стране применения на момент утилизации.

Придерживайтесь национальных стандартов при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, НАЗВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ- ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НА ПРИНЯТИЕ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

Производитель гарантирует, что при разработке и производстве данного изделия были соблюдены разумные меры предосторожности. Производитель гарантирует соответствие изделий заявленным в документации показателям качества и характеристикам. Производитель гарантирует сохранность всех свойств медицинского изделия в течение 5 лет с даты производства, в зависимости от варианта исполнения, при целостности упаковки и соблюдений условий транспортировки и хранения. В случае применения изделий за пределами параметров спецификации не может быть гарантирована правильность работы изделий. Производитель не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, ущерб или расходы, прямо или косвенно связанные с использованием данного изделия; не несет ответственности в отношении изделий, подвергаемых повторной обработке или стерилизации, используемых повторно, подвергаемых воздействию климатических и механических факторов при транспортировании и хранении, отличных от указанных в документации производителя, и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая, помимо всего прочего, гарантии коммерческого качества и пригодность для использования по назначению в отношении таких изделий.

Уполномоченный представитель:

Общество с ограниченной ответственностью "Апексмед Рус"

Почтовый адрес - Россия, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская д.24, стр. 1, ком. 606.

Юридический адрес - Россия, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская д.24, стр. 1, ком. 606.

Телефон - 8-495-108-03-64,

Веб.сайт - apexmed.ru

e-mail - info@apexmed.ru, quality@apexmed.ru

ИНН - 7717777072

Производитель:

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd., Нинбо Грейткеа Трейдинг Ко., Лтд.

Unit 93, Building 12, № 818, Qiming Road, Yinzhou 315105, Ningbo, Zhejiang, China, Блок 93, корпус 12, №818, Киминг Роуд, Иньчжоу, 315105, Нинбо, Чжэцзян, Китай

Место производства:

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd. (Нинбо Грейткеа Трейдинг Ко., Лтд.), Unit 93, Building 12, № 818, Qiming Road, Yinzhou 315105, Ningbo, Zhejiang, China (Блок 93, корпус 12, №818, Киминг Роуд, Иньчжоу, 315105, Нинбо, Чжэцзян, Китай).

Рекламации

В случае возникновения претензий, по всем вопросам обращайтесь к уполномоченному представителю в Российской Федерации компании. Организация, уполномоченная производителем на принятие и удовлетворение требований от потребителей в отношении товара ненадлежащего качества:

Общество с ограниченной ответственностью «Апексмед Рус»

ООО «Апексмед Рус»

Почтовый адрес: 107023, Россия, г. Москва, Электрозаводская улица, дом 24 строение 1, комната 606

Юридический адрес: 107023, Россия, г. Москва, Электрозаводская улица, дом 24 строение 1, комната 606

Тел.: +7(495)108-03-64, www.apexmed.ru,

info@apexmed.ru

ИНН 7717777072



本附加证明书仅证明文书上的签名、签署人署名时的身份。签署时可证明文书上的印章属实。附加证明书不对公文内容予以证明。
This Apostille only certifies the authenticity of the signature, the capacity of the person who has signed the public document and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
Visit <https://consular.mfa.gov.cn/VERIFY/> and scan the QR code to verify the issuance of this Apostille.



10356525



附加证明书
APOSTILLE

(1961年10月5日海牙公约)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. 文书出具国: 中华人民共和国
Country: People's Republic of China

本公文 This public document

2. 签署人
has been signed by 杨迪鑫
Yang Dixin

3. 签署人身份
acting in the capacity of 签证员
Authorized Official

4. 印鉴名称
bears the seal/stamp of 中国国际贸易促进委员会(18)
China Council for the Promotion of International Trade(18)

证明 Certified

5. 签发地 宁波
at Ningbo

6. 签发日期 2024年03月25日
the March 25, 2024

7. 签发人 徐乐平/Xu Leping
by 宁波市外事办公室
Foreign Affairs Office of Ningbo Municipality



8. 附加证明书编号 认字第243310003350号
No

9. 签发机关印鉴:
Seal/Stamp:



10. 签名:
Signature:

徐乐平

**Китайский Совет Содействия Международной Торговле
Китайская Палата Международной Торговли**

СЕРТИФИКАТ

№: 243302A0/H01403

**Настоящим свидетельствует, что приложенная копия документа
соответствует оригиналу.**

**Китайский Совет Содействия
Международной Торговле**

[Печать для сертификации]

**Уполномоченное лицо: Янг Дисин
Подпись: Янг Дисин
Дата: 25 марта 2024**

[Печать Нинбо Грейткэа Трейдинг Ко., Лтд]

подпись

10356525

Данный апостиль удостоверяет только подлинность подписи, дееспособность лица, подписавшего официальный документ и, при необходимости, идентификационные данные печати или штампа, которые стоят на официальном документе. Апостиль не удостоверяет содержание документа, на который он выдан.

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Страна Китайская народная республика

Этот государственный документ

2. был подписан Янг Дисин

3. действующим (-ей) в качестве уполномоченного лица

4. документ имеет печать/штамп Китайского Совета Содействия Международной Торговле (18)

Заверено

5. в Нинбо

6. 25-03-2024

7. Сю Лепин / Управление иностранных дел
муниципалитета Нинбо

8. № 243310003350

9. Печать/штамп:

10. Подпись:

Сю Лепин (подпись)

Перевод с английского и китайского языков на русский выполнил переводчик Чечеткин Сергей Владимирович.

Чечеткин Сергей Владимирович



Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого апреля две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Шаропова Екатерина Петровна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Чететкина Сергея Владимировича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/1965-н/77-2024-3-1450.

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Е.П. Шаропова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 68 (шестьдесят восемь) листов.

Е.П. Шаропова