

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД»

Титова Е. В.

« 20 »

2024 г.



Макеты маркировки медицинского изделия

«Устройства полимерные для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильные с иглами инъекционными

по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020»,

производства ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД», Россия

МАКЕТЫ

маркировки потребительской упаковки медицинского изделия «Устройства полимерные для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильные с иглами инъекционными по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020»




Рис. 1 Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия:

«Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглой инъекционной (0,80х40,0) мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020»



Рис. 2 Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия:

«Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглами инъекционными (0,80х40,0/1,20х40,0) мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020»

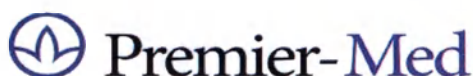

Производитель ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД",
Россия, 115201, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Нагатино-Садовники, пер 1-й Котляковский, д. 2
Место производства ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД", Россия, 399770, Липецкая область,
г.Елец, Орловское ш., д. 21

УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛЬНОЕ С НАКОНЕЧНИКОМ ТИПА «ЛУЕР» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД»
С ИГЛАМИ ИНЪЕКЦИОННЫМИ по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020

ГОСТ 25047

ПУ № РЗН 2023/19585

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Вскрыть потребительскую тару и извлечь устройство. Закрепить зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы совмещенной полимерной двухканальной и ввести её в штицер полимерной емкости (контейнера) или пробку стеклянной бутылки.
- Заполнить капельницу до половины, сдавливая её корпус.
- При использовании стеклянных бутылок открыть заглушку воздушного клапана. (при вливании из контейнера клапан не открывать!)
- Открыть зажим и выпустить воздух, наполнив устройство до полного вытеснения воздуха.
- Закрепить зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы инъекционной и произвести венопункцию.
- Открыть зажим и установить необходимую скорость потока.

ВНИМАНИЕ!

- Не использовать для переливания крови и её компонентов.
- Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.
- Однократного применения / Не использовать повторно /
- Не стерилизовать повторно.
- Не применять при нарушении целостности потребительской тары.
- Срок годности пять лет.
- Стерильно внутри / Апиrogenно / Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Размер иглы инъекционной 0,80x40,0 мм
- Размер иглы инъекционной 0,90x40,0 мм
- Длина трубки 2000 ± 30 мм

открывать здесь



LOT 01

Дата стерилизации 02.2024

Годен до 02.2029

ПР 23-05

Рис. 3 Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия:

«Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглами инъекционными (0,80x40,0/0,90x40,0) мм с трубкой 2000 мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020»



Производитель ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД",
Россия, 115201, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Нагатино-Садовники, пер 1-й Котляковский, д. 2
Место производства ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД", Россия, 399770, Липецкая область,
г.Елец, Орловское ш., д. 21

УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛЬНОЕ С НАКОНЕЧНИКОМ ТИПА «ЛУЕР» ПР 23-05-У. «ПРЕМЬЕР-МЕД» СВЕТОЗАЩИТНОЕ
С ИГЛАМИ ИНЪЕКЦИОННЫМИ по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020

ГОСТ 25047

ПУ № РЗН 2023/19585

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Вскрыть потребительскую тару и извлечь устройство. Закрепить зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы совмещенной полимерной двухканальной и ввести её в штицер полимерной емкости (контейнера) или пробку стеклянной бутылки.
- Заполнить капельницу до половины, сдавливая её корпус.
- При использовании стеклянных бутылок открыть заглушку воздушного клапана. (при вливании из контейнера клапан не открывать!)
- Открыть зажим и выпустить воздух, наполнив устройство до полного вытеснения воздуха.
- Закрепить зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы инъекционной и произвести венопункцию.
- Открыть зажим и установить необходимую скорость потока.

ВНИМАНИЕ!

- Не использовать для переливания крови и её компонентов.
- Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.
- Однократного применения / Не использовать повторно /
- Не стерилизовать повторно.
- Не применять при нарушении целостности потребительской тары.
- Срок годности пять лет.
- Стерильно внутри / Апиrogenно / Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Размер иглы инъекционной 0,80x40,0 мм
- Размер иглы инъекционной 0,90x40,0 мм

открывать здесь



LOT 01

Дата стерилизации 02.2024

Годен до 02.2029

ПР 23-05

Рис. 4 Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия:

«Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер» ПР 23-05-У. «ПРЕМЬЕР-МЕД» светозащитное с иглами инъекционными (0,80x40,0/0,90x40,0) мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020»

МАКЕТЫ

маркировки транспортной упаковки медицинского изделия
«Устройства полимерные для вливания кровезаменителей и инфузионных
растворов однократного применения стерильные с иглами инъекционными
по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020»



Premier-Med

Устройство полимерное для вливания кровезаменителей
и инфузионных растворов однократного применения
стерильное с наконечником типа «Луер»
ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглой инъекционной
по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020

ПУ № РЗН 2023/19585

Стерильно внутри. Апирогенно. Нетоксично.
Срок годности пять лет
Хранить от +5 до +40° С,
относительная влажность 80% при 25° С (верхнее значение)

STERILE EO



Производитель: ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД"
Россия, 115201, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагатино-Садовники,
пер 1-й Котляковский, д. 2
Место производства: ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД", Россия, 399770,
Липецкая область, г. Елец, Орловское ш., д. 21

LOT

Дата стерилизации

Голен до

Размер иглы инъекционной (мм)

Штамп ОТК

ПР 23-05

Упаковка 200 шт
Брутто 5 кг


Рис. 5 Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия:
«Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного
применения стерильное с наконечником типа «Луер» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглой
инъекционной по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020»



Устройство полимерное для вливания кровезаменителей
и инфузионных растворов однократного применения
стерильное с наконечником типа «Луер»
ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглами инъекционными
по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020

РУ № РЗН 2023/19585

Стерильно внутри. Апирогенно. Нетоксично.
Срок годности пять лет
Хранить от +5 до +40° С,
относительная влажность 80% при 25° С (верхнее значение)

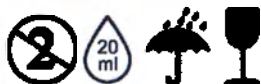

Производитель: ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД"
Россия, 115201, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагатино-Садовники,
пер 1-й Котляковский. д. 2
Место производства: ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД", Россия, 399770,
Липецкая область, г. Елец, Орловское ш., д. 21

LOT

Дата стерилизации

Годен до

Размер иглы инъекционной (мм)

Штамп ОТК

ПР 23-05

Упаковка 200 шт
Брутто 5 кг

Рис. 6 Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия:

«Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглами инъекционными по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020»



Устройство полимерное для вливания кровезаменителей
и инфузионных растворов однократного применения
стерильное с наконечником типа «Луер»
ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглой инъекционной
по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020

ПУ № РЗН 2023/19585

Стерильно внутри. Апирогенно. Нетоксично.
Срок годности пять лет
Хранить от +5 до +40° С,
относительная влажность 80% при 25° С (верхнее значение)



Производитель: ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД»
Россия, 115201, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагатино-Садовники,
пер 1-й Котляковский, д. 2
Место производства: ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД», Россия, 399770,
Липецкая область, г. Елец, Орловское ш., д. 21

LOT

Дата стерилизации

Годен до

Размер иглы инъекционной (мм)

Длина трубки (мм)

Штамп ОТК

ПР 23-05

Упаковка 200 шт
Брутто 5 кг

Рис. 7 Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия:


«Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглой инъекционной по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020» (при заказе с удлиненной соединительной трубкой)



Устройство полимерное для вливания кровезаменителей
и инфузионных растворов однократного применения
стерильное с наконечником типа «Луер»
ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглой инъекционной
по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020

РУ № РЗН 2023/19585

Стерильно внутри. Апирогенно. Нетоксично.
Срок годности пять лет
Хранить от +5 до +40° С,
относительная влажность 80% при 25° С (верхнее значение)

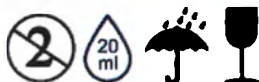

Производитель: ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД"
Россия, 115201, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагатино-Садовники,
пер 1-й Котляковский, д. 2
Место производства: ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД", Россия, 399770,
Липецкая область, г. Елец, Орловское ш., д. 21

LOT

01

Дата стерилизации

02.2024

Годен до

02.2029

Размер иглы инъекционной (мм)

0,80x40,0

Штамп ОТК

04

ПР 23-05

Упаковка 200 шт
Брутто 5 кг

Рис. 8 Макет (пример заполнения) маркировки транспортной упаковки медицинского изделия
(при комплектации устройства одной иглой инъекционной):

«Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного
применения стерильное с наконечником типа «Луер» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглой
инъекционной (0,80x40,0) мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020»



Устройство полимерное для вливания кровезаменителей
и инфузионных растворов однократного применения
стерильное с наконечником типа «Луер»
ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглами инъекционными
по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020

РУ № РЗН 2023/19585

Стерильно внутри. Апиrogenно. Нетоксично.
Срок годности пять лет
Хранить от +5 до +40° С,
относительная влажность 80% при 25° С (верхнее значение)



Производитель: ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД"

Россия, 115201, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагатинно-Садовники,
пер 1-й Котляковский, д. 2

Место производства: ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД", Россия, 399770,
Липецкая область, г. Елец, Орловское ш., д. 21

LOT

01

Дата стерилизации

02.2024

Годен до

02.2029

Размер иглы инъекционной (мм)

0,80x40/0,90x40

Штамп ОТК

04

ПР 23-05

Упаковка 200 шт
Брутто 5 кг

Рис. 9 Макет (пример заполнения) маркировки транспортной упаковки медицинского изделия
(при комплектации устройства двумя иглами инъекционными):

«Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного
применения стерильное с наконечником типа «Луер» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглами
инъекционными (0,80x40,0/0,90x40,0) мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020»



Устройство полимерное для вливания кровезаменителей
и инфузионных растворов однократного применения
стерильное с наконечником типа «Луер»
ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглой инъекционной
по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020

РУ № РЗН 2023/19585

Стерильно внутри. Апирогенно. Нетоксично.
Срок годности пять лет
Хранить от +5 до +40° С,
относительная влажность 80% при 25° С (верхнее значение)



Производитель: ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД"

Россия, 115201, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагатинно-Садовники,
пер 1-й Котляковский, д. 2

Место производства: ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД", Россия, 399770,
Липецкая область, г. Елец, Орловское ш., д. 21

LOT

01

Дата стерилизации

02.2024

Годен до

02.2029

Размер иглы инъекционной (мм)

0,80x40,0

Длина трубки (мм)

1800±30

Штамп ОТК

04

ПР 23-05

Упаковка 200 шт
Брутто 5 кг

Рис. 10 Макет (пример заполнения) маркировки транспортной упаковки медицинского изделия (при заказе с удлиненной соединительной трубкой):

«Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглами инъекционными (0,80x40,0/0,90x40,0) мм с трубкой 1800 мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020»

Прошнуровано и
пронумеровано

9 (девять)

листов

Директор
ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД»

Е.В. ТИТОВА



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД»

Титова Е.В.

«12» ноября 2024 г.



ФАЙЛ

фотографическое изображение медицинского изделия

**«Устройства полимерные для вливания кровезаменителей и инфузионных
растворов однократного применения стерильные
с иглами инъекционными по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020»,
ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД», Россия**

2024г.



Фото 1. Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглами инъекционными (0,80x40,0/1,20x40,0) мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020. Общий вид.



Фото 2. Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер» ПР 23-05-У. «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглой инъекционной (0,80х40,0) мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020. Общий вид.



Фото 3. Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер-Лок» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглой инъекционной (0,80x40,0) мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020. Общий вид.

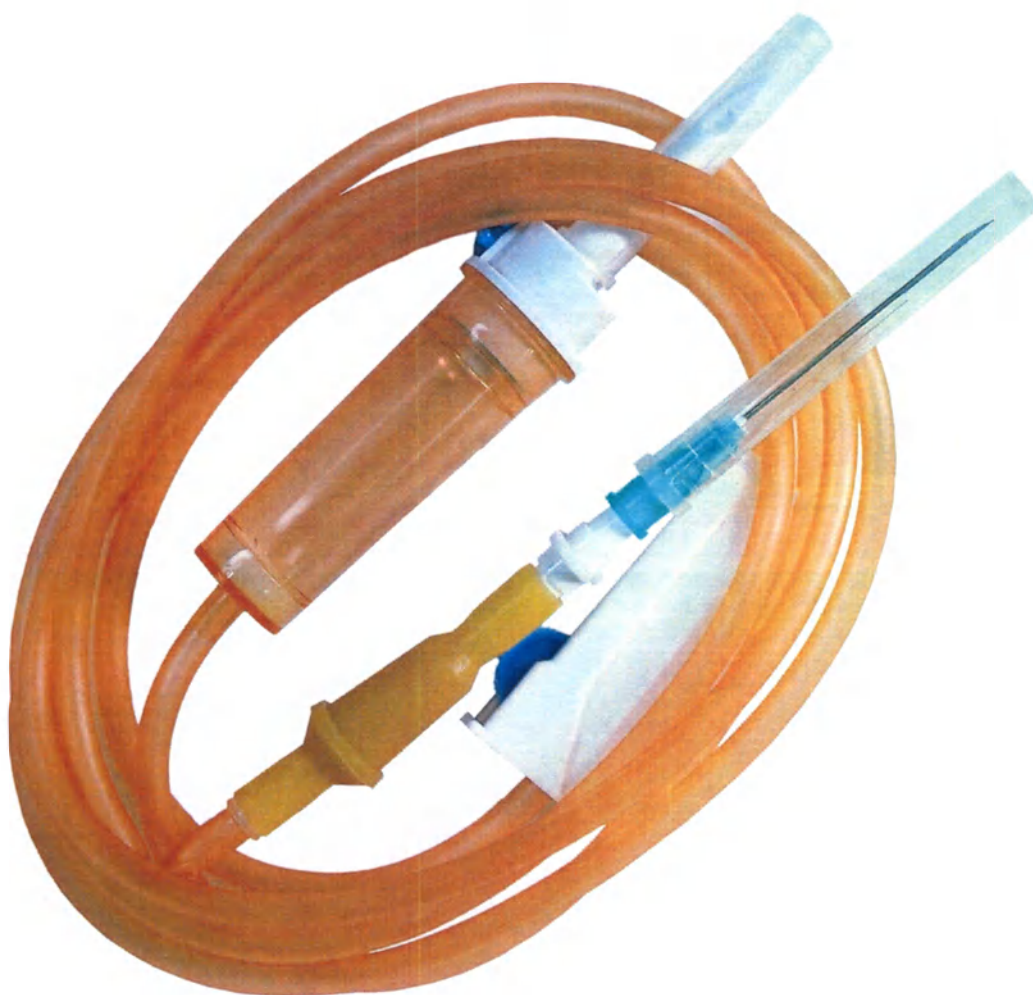


Фото 4. Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» светозащитное с иглой инъекционной (0,80x40,0) мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020. Общий вид.

**УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ КРОВЕЗАМЕНТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛЬНОЕ С НАКОНЕЧНИКОМ ТИПА «ЛУЕР» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД»
С ИГЛАМИ ИНЪЕКЦИОННЫМИ по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020**

ГОСТ 25047

РУ № РЗН 2023/19585

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Вскрыть потребительскую тару и извлечь устройство. Закрепить зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы соединенной полимерной двухканальной и ввести ее в штуцер полимерной емкости (контейнера) или пробку стеклянной бутылки.
- Заполнить капельницу до половины, сдавив ее корпус.
- При использовании стеклянных бутылок открыть заглушку воздушного клапана. (при вливании из контейнера клапан не открывать)
- Открыть зажим и выпустить воздух, заполнив устройство до полного вытеснения воздуха.
- Закрепить зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы инъекционной и произвести венепункцию.
- Открыть зажим и установить необходимую скорость потока.

ВНИМАНИЕ!

- Не использовать для переливания крови и ее компонентов.
- Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.
- Однократного применения / Не использовать повторно /
- Не стерилизовать повторно.
- Не применять при нарушении целостности потребительской тары.
- Срок годности пять лет.
- Стерильно внутри / Аспирогенно / Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Размер иглы инъекционной **0,80x40,0 мм**
- Размер иглы инъекционной **0,90x40,0 мм**

ПР 23-05



ГОТ 01



STERILE EO



Дата стерилизации 02.2024

Годен до 02.2029

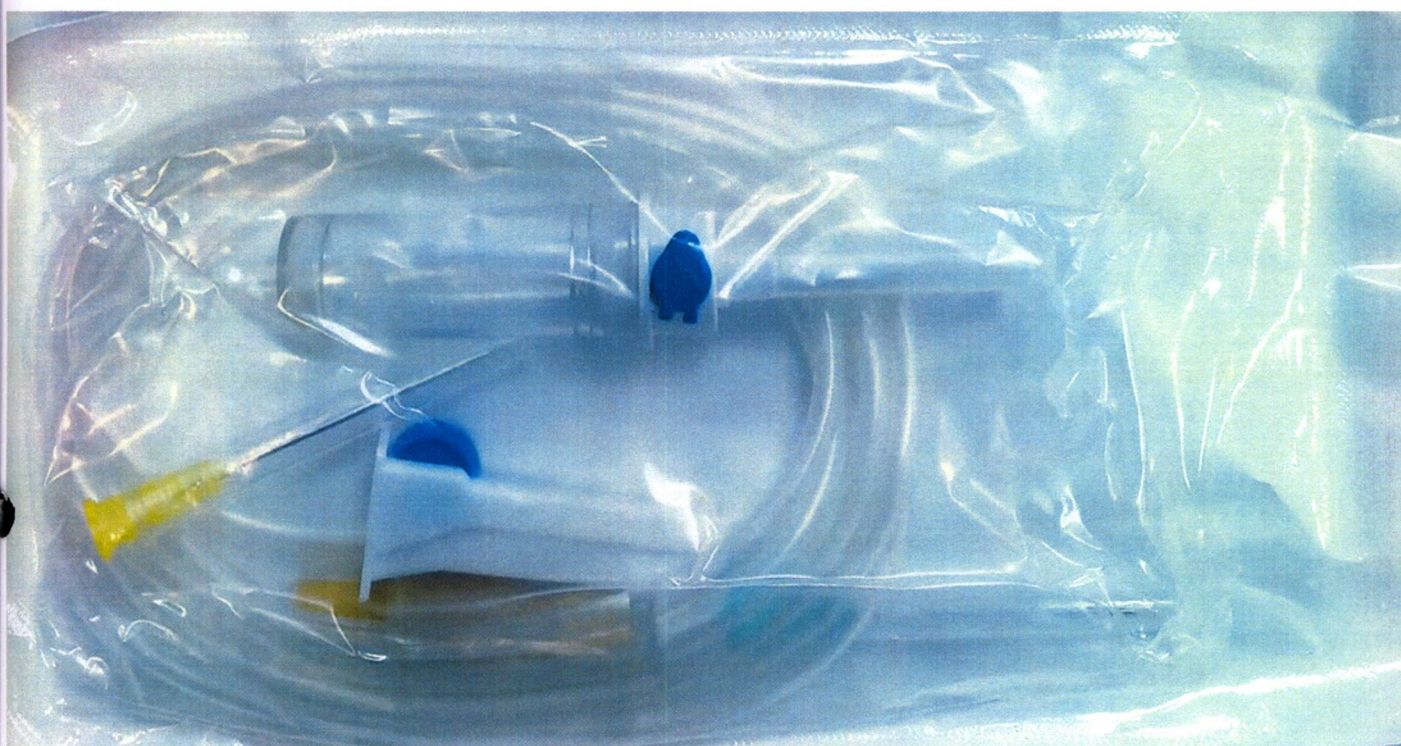


Фото 5. Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглами инъекционными (0,80x40,0/0,90x40,0) мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020. Общий вид в потребительской упаковке.



Производитель ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД",
Россия, 115201, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Нагатино-Садовники, пер 1-й Котляковский, д. 2
Место производства ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД", Россия, 399770, Пилецкая область,
г. Елец, Орловское ш., д. 21

**УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛЬНОЕ С НАКОНЕЧНИКОМ ТИПА «ЛУЕР» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД»
С ИГЛАМИ ИНЪЕКЦИОННЫМИ по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020**

ГОСТ 25047

РУ № РЗН 2023/19585

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Вскрыть потребительскую тару и извлечь устройство. Закрепить зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы совмещенной полимерной двухканальной и ввести её в штуцер полимерной емкости (контейнера) или пробку стеклянной бутылки.
- Заполнить капельницу до половины, сдавливая её корпус.
- При использовании стеклянных бутылок открыть заглушку воздушного клапана. (при вливании из контейнера клапан не открывать!)
- Открыть зажим и вытеснить воздух, заполнив устройство до полного вытеснения воздуха.
- Закрепить зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы инъекционной и произвести венопункцию.
- Открыть зажим и установить необходимую скорость потока.

ВНИМАНИЕ!

- Не использовать для переливания крови и её компонентов.
- Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.
- Однократного применения / Не использовать повторно /
- Не стерилизовать повторно.
- Не применять при нарушении целостности потребительской тары.
- Срок годности пять лет.
- Стерильно внутри / Апиrogenно / Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Размер иглы инъекционной **0,80x40,0 мм**
- Размер иглы инъекционной **1,20x40,0 мм**

ПР 23-05



LOT 01

Дата стерилизации 02.2024

Годен до 02.2029



Фото 6. Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглами инъекционными (0,80x40,0/1,20x40) мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020. Общий вид в потребительской упаковке.



Производитель ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД",
Россия, 115201, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Нагатино-Садовники, пер 1-й Котляковский, д. 2
Место производства ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД", Россия, 399770, Липецкая область,
г.Елец, Орловское ш., д. 21

УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛЬНОЕ С НАКОНЕЧНИКОМ ТИПА «ЛУЕР» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД»
СИГЛАМИ ИНЪЕКЦИОННЫМИ по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020

ГОСТ 25047

РУ № РЗН 2023/19585

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Вскрыть потребительскую тару и извлечь устройство. Закрепить зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы соединенной полимерной двухканальной и ввести её в штиф полимерной емкости (контейнера) или пробку стеклянной бутылки.
- Заполнить капельницу до половины, сдавливая её корпус.
- При использовании стеклянных бутылок открыть заглушку воздушного клапана. (при вливании из контейнера клапан не открывать!)
- Открыть зажим и выпустить воздух, заполняя устройство до полного вытеснения воздуха.
- Закрепить зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы инъекционной и произвести венопункцию.
- Открыть зажим и установить необходимую скорость потока.

ВНИМАНИЕ!

- Не использовать для гереливания крови и её компонентов.
- Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.
- Однократного применения / Не использовать повторно /
- Не стерилизовать повторно.
- Не применять при нарушении целостности потребительской тары.
- Срок годности пять лет.
- Стерильно внутри / Асептично / Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Размер иглы инъекционной 0,80x40,0 мм
- Размер иглы инъекционной 0,90x40,0 мм
- Длина трубки 1800 ± 30 мм



LOT 01

Дата стерилизации 02.2024

Годен до 02.2029

ПР 23-05



Фото 7. Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглами инъекционными (0,80x40,0/0,90x40,0) мм с трубкой 1800 мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020. Общий вид в потребительской упаковке.



Производитель ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД",
Россия, 115201, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Нагатино-Садовники, пер 1-й Котляковский, д. 2
Место производства ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД", Россия, 399770, Липецкая область,
г.Елец, Орловское ш., д. 21

УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ КРОВЕЗАМЕНТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛЬНОЕ С НАКОНЕЧНИКОМ ТИПА «ЛУЕР» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД»
С ИГЛАМИ ИНЪЕКЦИОННЫМИ по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020

ГОСТ 25047

РУ № РЗН 2023/19585

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Вскрыть потребительскую тару и извлечь устройство. Закрепить зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы совмещенной полимерной двухканальной и ввести её в штуцер полимерной емкости (контейнера) или пробку стеклянной бутылки.
- Заполнить каплемер до половины, сдвигая её корпус.
- При использовании стеклянных бутылок открыть заглушку воздушного клапана. (при вливании из контейнера клапан не стравливать!)
- Открыть зажим и выпустить воздух, заполнив устройство до полного вытеснения воздуха.
- Закрепить зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы инъекционной и произвести постановку.
- Открыть зажим и установить необходимую скорость потока.

ВНИМАНИЕ

- Не использовать для переливания крови и её компонентов.
- Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.
- Однократного применения / Не использовать повторно /
- Не стерилизовать повторно.
- Не применять при нарушении целостности потребительской тары.
- Срок годности пять лет.
- Стерильно внутри / Априорно / Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Размер иглы инъекционной 0,80x40,0 мм
- Размер иглы инъекционной 0,90x40,0 мм
- Длина трубки 2000 ± 30 мм



LOT 01



STERILE EO



Дата стерилизации 02.2024

Годен до 02.2029

ПР 23-05

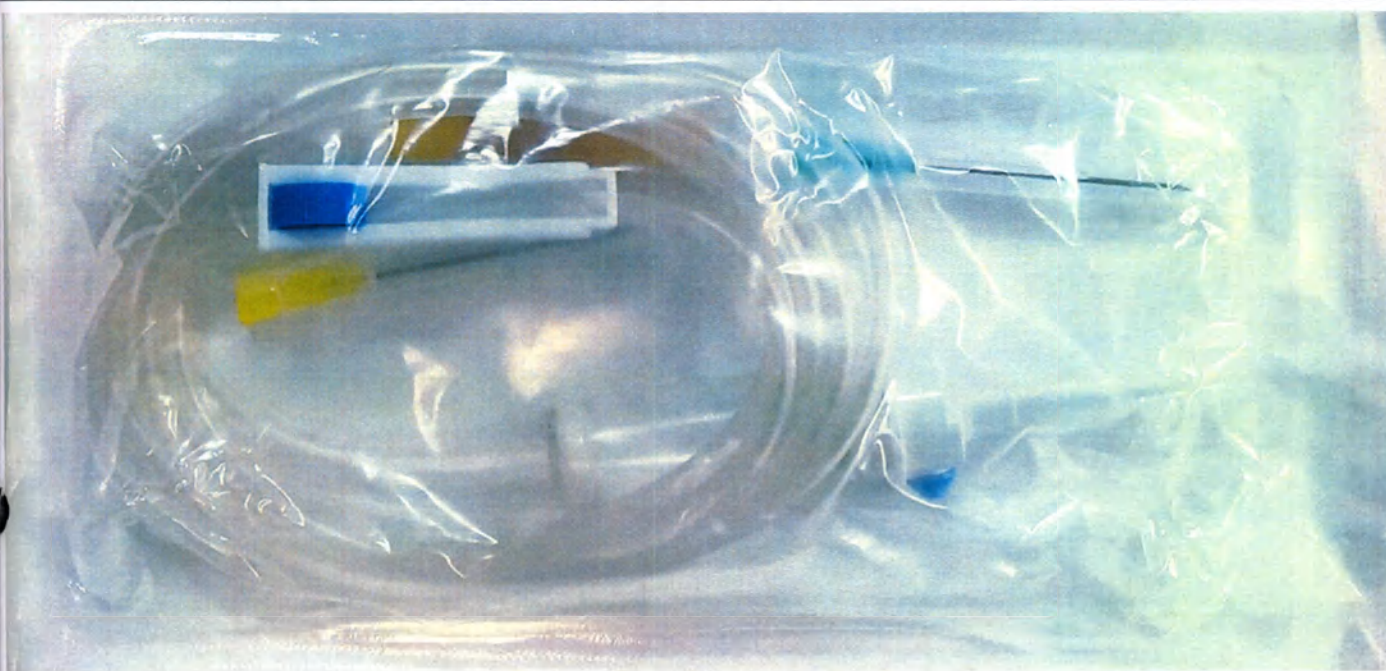


Фото 8. Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглами инъекционными (0,80x40,0/0,90x40,0) мм с трубкой 2000 мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020. Общий вид в потребительской упаковке.



Производитель ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД",
Россия, 115201, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Нагатинно-Садовники, пер 1-й Котляковский, д. 2
Место производства ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД", Россия, 399770, Липецкая область,
г.Елец, Орловское ш., д. 21

УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ КРОВЕЗАМЕНТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛЬНОЕ С НАКОНЕЧНИКОМ ТИПА «ЛУЕР» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД»
С ИГЛАМИ ИНЪЕКЦИОННЫМИ по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020

ГОСТ 25047

ПУ № РЗН 2023/19585

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Вскрыть потребительскую тару и извлечь устройство. Закрыть зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы совмещенной полимерной двухканальной и ввести её в штуцер полимерной емкости (контейнера) или пробку стеклянной бутылки.
- Заполнить капельницу до половины, сдавливая её корпус.
- При использовании стеклянных бутылок открыть заглушку воздушного клапана. (при вливании из контейнера клапан не открывать!)
- Открыть зажим и выпустить воздух, заполнив устройство до полного вытеснения воздуха.
- Закрыть зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы инъекционной и произвести венопункцию.
- Открыть зажим и установить необходимую скорость потока.

ВНИМАНИЕ!

- Не использовать для переливания крови и её компонентов.
- Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.
- Однократного применения / Не использовать повторно /
- Не стерилизовать повторно.
- Не применять при нарушении целостности потребительской тары.
- Срок годности пять лет.
- Стерильно внутри / Апирогенно / Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Размер иглы инъекционной 0,80x40,0 мм
- Размер иглы инъекционной 0,90x40,0 мм
- Длина трубки 2500±30 мм

ПР 23-05



STERILE EO



LOT 01

Дата стерилизации 02.2024

Годен до 02.2029



Фото 9. Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглами инъекционными (0,80x40,0/0,90x40,0) мм с трубкой 2500 мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020. Общий вид в потребительской упаковке.



Производитель ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД",
Россия, 115201, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Нагатинно-Садовники, пер 1-й Котляковский, д. 2
Место производства ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД", Россия, 399770, Липецкая область,
г.Елец, Орловское ш., д. 21

УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ КРОВЕЗАМЕНТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛЬНОЕ С НАКОНЕЧНИКОМ ТИПА «ЛУЕР» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» СВЕТОЗАЩИТНОЕ
С ИГЛАМИ ИНЪЕКЦИОННЫМИ по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020

ГОСТ 25047

РУ № РЗН 2023/19585

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Вскрыть потребительскую тару и извлечь устройство. Закрыть зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы совмещенной полимерной двухканальной и ввести её в штуцер полимерной емкости (контейнера) или пробку стеклянной бутылки.
- Заполнить капельницу до половины, сдавливая её корпус.
- При использовании стеклянных бутылок открыть заглушку воздушного клапана. (при вливании из контейнера клапан не открывать!)
- Открыть зажим и выпустить воздух, заполнив устройство до полного вытеснения воздуха.
- Закрыть зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы инъекционной и произвести венепункцию.
- Открыть зажим и установить необходимую скорость потока.

ВНИМАНИЕ!

- Не использовать для переливания крови и её компонентов.
- Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.
- Однократного применения / Не использовать повторно /
- Не стерилизовать повторно.
- Не применять при нарушении целостности потребительской тары.
- Срок годности пять лет.
- Стерильно внутри / Апирогенно / Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Размер иглы инъекционной 0,80x40,0 мм
- Размер иглы инъекционной 0,90x40,0 мм

ПР 23-05



LOT 01

Дата стерилизации 02.2024

Годен до 02.2029

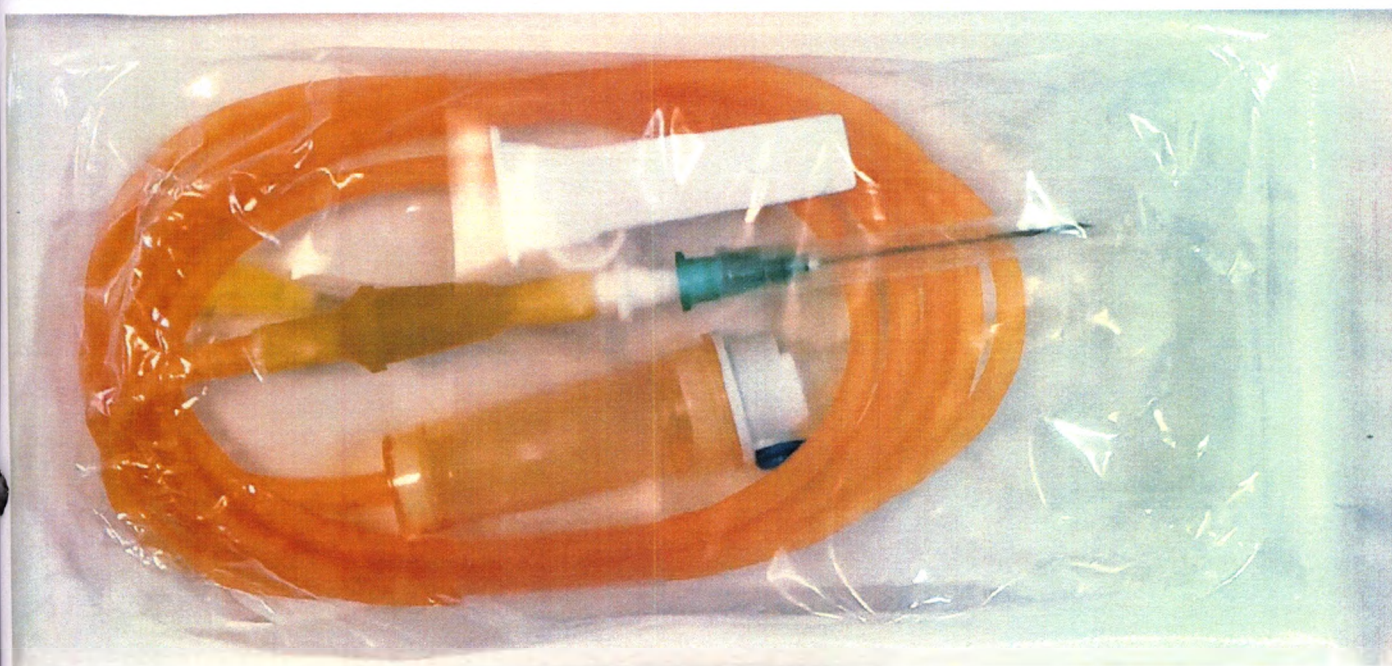


Фото 10. Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» светозащитное с иглами инъекционными (0,80x40,0/0,90x40,0) мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020. Общий вид в потребительской упаковке.



Производитель ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД",
Россия, 115201, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Нагатино-Садовники, пер 1-й Котляковский, д. 2
Место производства ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД", Россия, 399770, Липецкая область,
г.Елец, Орловское ш., д. 21

УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ КРОВЕЗАМЕНТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛЬНОЕ С НАКОНЕЧНИКОМ ТИПА «ЛУЕР-ЛОК» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД»
С ИГЛАМИ ИНЪЕКЦИОННЫМИ по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020

ГОСТ 25047

ПУ № РЗН 2023/19585

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Вскрыть потребительскую тару и извлечь устройство. Закрыть зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы совмещенной полимерной двухканальной и ввести её в штуцер полимерной емкости (контейнера) или пробку стеклянной бутылки.
- Заполнить капле-ницу до половины, сдвигая её корпус.
- При использовании стеклянных бутылок открыть заглушку воздушного клапана. (при вливании из контейнера клапан не открывать)
- Открыть зажим и выпустить воздух, заполнив устройство до полного вытеснения воздуха.
- Закрыть зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы инъекционной и произвести венопункцию.
- Открыть зажим и установить необходимую скорость потока.

ВНИМАНИЕ!

- Не использовать для переливания крови и её компонентов.
- Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.
- Однократного применения / Не использовать повторно /
- Не стерилизовать повторно.
- Не применять при нарушении целостности потребительской тары.
- Срок годности пять лет.
- Стерильно внутри / Апиrogenно / Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Размер иглы инъекционной 0,80x40,0 мм
- Размер иглы инъекционной 0,90x40,0 мм



LOT 01

Дата стерилизации 02.2024

Годен до 02.2029

ПР 23-05



Фото 11. Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер-лок» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглами инъекционными (0,80x40,0/0,90x40,0) мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020. Общий вид в потребительской упаковке.



Производитель ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД",
Россия, 115201, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Нагатино-Садовники, пер 1-й Котляковский, д. 2
Место производства ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД", Россия, 399770, Липецкая область,
г.Елец, Орловское ш., д. 21

УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ КРОВЕЗАМЕНТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛЬНОЕ С НАКОНЕЧНИКОМ ТИПА «ЛУЕР-ЛОК» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» СВЕТОЗАЩИТНОЕ
С ИГЛАМИ ИНЪЕКЦИОННЫМИ по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020

ГОСТ 25047

РУ № РЗН 2023/19585

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Вскрыть потребительскую тару и извлечь устройство. Закрыть зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы совмещенной полимерной двухканальной и ввести её в штуцер полимерной емкости (контейнера) или пробку стеклянной бутылки.
- Заполнить капельницу до половины, сдавливая её корпус.
- При использовании стеклянных бутылок открыть заглушку воздушного клапана. (при вливании из контейнера клапан не открывать!)
- Открыть зажим и выпустить воздух, заполнив устройство до полного вытеснения воздуха.
- Закрыть зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы инъекционной и произвести венопункцию.
- Открыть зажим и установить необходимую скорость потока.

ВНИМАНИЕ!

- Не использовать для переливания крови и её компонентов.
- Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.
- Однократного применения / Не использовать повторно /
- Не стерилизовать повторно.
- Не применять при нарушении целостности потребительской тары.
- Срок годности пять лет.
- Стерильно внутри / Апиrogenно / Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Размер иглы инъекционной **0,80x40,0 мм**
- Размер иглы инъекционной **0,90x40,0 мм**



LOT 01



Дата стерилизации 02.2024

Годен до 02.2029

ПР 23-05



Фото 12. Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер-Лок» ПР 23-05 «ПРЕМЬЕР-МЕД» светозащитное с иглами инъекционными (0,80x40,0/0,90x40,0) мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020. Общий вид в потребительской упаковке.

**УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ КРОВЕЗАМЕНТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛЬНОЕ С НАКОНЕЧНИКОМ ТИПА «ЛУЕР» ПР 23-05-У, «ПРЕМЬЕР-МЕД»
С ИГЛАМИ ИНЪЕКЦИОННЫМИ по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020**

ГОСТ 25047

ПУ № РЗН 2023/19585

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Вскрыть потребительскую тару и извлечь устройство. Закрепить зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы совмещенной полимерной двухканальной и ввести её в штуцер полимерной емкости (контейнера) или пробку стеклянной бутылки.
- Заполнить капельницу до половины, сдавливая её корпус.
- При использовании стеклянных бутылок открыть заглушку воздушного клапана. (при описании из инструкции клапан не открывать!)
- Открыть зажим и выпустить воздух, заполнив устройство до полного вытеснения воздуха.
- Закрепить зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы инъекционной и произвести венепункцию.
- Открыть зажим и установить необходимую скорость потока.

ВНИМАНИЕ!

- Не использовать для терепивания крови и её компонентов.
- Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.
- Однократного применения / Не использовать повторно /
- Не стерилизовать повторно.
- Не применять при нарушении целостности потребительской тары.
- Срок годности пять лет.
- Стерильно внутри / Алергенно / Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Размер иглы инъекционной **0,80x40,0 мм**
- Размер иглы инъекционной **0,90x40,0 мм**



LOT 01



Дата стерилизации 02.2024

Годен до 02.2029

ПР 23-05



Фото 13. Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер» ПР 23-05-У. ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглами инъекционными (0,80x40,0/0,90x40,0) мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020. Общий вид в потребительской упаковке.



Производитель ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД",
Россия, 115201, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Нагатино-Садовники, пер 1-й Котляковский, д. 2
Место производства ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД", Россия, 399770, Липецкая область,
г.Елец, Орловское ш., д. 21

УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛЬНОЕ С НАКОНЕЧНИКОМ ТИПА «ЛУЕР» ПР 23-05-У. «ПРЕМЬЕР-МЕД» СВЕТОЗАЩИТНОЕ
С ИГЛАМИ ИНЪЕКЦИОННЫМИ по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020

ГОСТ 25047

ПУ № РЗН 2023/19585

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Вскрыть потребительскую тару и извлечь устройство. Закрепить зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы совмещенной полимерной двухканальной и ввести её в штуцер полимерной емкости (контейнера) или пробку стеклянной бутылки.
- Заполнить капельницу до половины, сдавливая её корпус.
- При использовании стеклянных бутылок открыть заглушку воздушного клапана. (при вливании из контейнера клапан не открывать!)
- Открыть зажим и выпустить воздух, заполнив устройство до полного вытеснения воздуха.
- Закрепить зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы инъекционной и произвести венеопункцию.
- Открыть зажим и установить необходимую скорость потока.

ВНИМАНИЕ!

- Не использовать для переливания крови и её компонентов.
- Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.
- Однократного применения / Не использовать повторно /
- Не стерилизовать повторно.
- Не применять при нарушении целостности потребительской тары.
- Срок годности пять лет.
- Стерильно внутри / Алерогенно / Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Размер иглы инъекционной 0,80x40,0 мм
- Размер иглы инъекционной 0,90x40,0 мм

ПР 23-05



LOT 01

Дата стерилизации 02.2024

Годен до 02.2029



Фото 14. Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер» ПР 23-05-У. «ПРЕМЬЕР-МЕД» светозащитное с иглами инъекционными (0,80x40,0/0,90x40,0) мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020. Общий вид в потребительской упаковке.



Производитель ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД",
Россия, 115201, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Нагатино-Садовники, пер 1-й Котляковский, д. 2
Место производства ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД", Россия, 399770, Липецкая область,
г.Елец, Орловское ш., д. 21

УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ КРОВЕЗАМЕНТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛЬНОЕ С НАКОНЕЧНИКОМ ТИПА «ЛУЕР-ЛОК» ПР 23-05 -У. «ПРЕМЬЕР-МЕД»
С ИГЛАМИ ИНЪЕКЦИОННЫМИ по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020

ГОСТ 25047

ПУ № РЗН 2023/19585

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Вскрыть потребительскую тару и извлечь устройство. Закрыть зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы совмещенной полимерной двухканальной и ввести её в штуцер полимерной емкости (контейнера) или пробку стеклянной бутылки.
- Заполнить капельницу до половины, сдавливая её корпус.
- При использовании стеклянных бутылок открыть заглушку воздушного клапана. (при вливании из контейнера клапан не открывать!)
- Открыть зажим и выпустить воздух, заполнив устройство до полного вытеснения воздуха.
- Закрыть зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы инъекционной и произвести венопункцию.
- Открыть зажим и установить необходимую скорость потока.

ВНИМАНИЕ!

- Не использовать для переливания крови и её компонентов.
- Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.
- Однократного применения / Не использовать повторно /
- Не стерилизовать повторно.
- Не применять при нарушении целостности потребительской тары.
- Срок годности пять лет.
- Стерильно внутри / Алирогенно / Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Размер иглы инъекционной 0,80x40,0 мм
- Размер иглы инъекционной 0,90x40,0 мм

открывать здесь



STERILE EO



LOT 01

Дата стерилизации 02.2024

Годен до 02.2029

ПР 23-05



Фото 15. Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер-Лок» ПР 23-05 -У. «ПРЕМЬЕР-МЕД» с иглами инъекционными (0,80x40,0/0,90x40,0) мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020. Общий вид в потребительской упаковке.



Производитель ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД",
Россия, 115201, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Нагатинно-Садовники, пер 1-й Котляковский, д. 2
Место производства ООО "ПРЕМЬЕР-МЕД", Россия, 399770, Липецкая область,
г. Елец, Орловское ш., д. 21

УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРНОЕ ДЛЯ ВЛИВАНИЯ КРОВЕЗАМЕНТЕЛЕЙ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛЬНОЕ С НАКОНЕЧНИКОМ ТИПА «ЛУЕР-ЛОК» ПР 23-05-У. «ПРЕМЬЕР-МЕД» СВЕТОЗАЩИТНОЕ
С ИГЛАМИ ИНЪЕКЦИОННЫМИ по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020

ГОСТ 25047

ПУ № РЗН 2023/19585

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Вскрыть потребительскую тару и извлечь устройство. Закрыть зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы совмещенной полимерной двухканальной и ввести её в штуцер полимерной емкости (контейнера) или пробку стеклянной бутылки.
- Заполнить капельницу до половины, сдавливая её корпус.
- При использовании стеклянных бутылок открыть заглушку воздушного клапана. (при вливании из контейнера клапан не открывать!)
- Открыть зажим и выпустить воздух, заполнив устройство до полного вытеснения воздуха.
- Закрыть зажим.
- Снять предохранительный колпачок с иглы инъекционной и произвести венопункцию.
- Открыть зажим и установить необходимую скорость потока.

ВНИМАНИЕ!

- Не использовать для переливания крови и её компонентов.
- Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.
- Однократного применения / Не использовать повторно /
- Не стерилизовать повторно.
- Не применять при нарушении целостности потребительской тары.
- Срок годности пять лет.
- Стерильно внутри / Апиrogenно / Нетоксично
- Стерилизовано оксидом этилена
- Размер иглы инъекционной 0,80x40,0 мм
- Размер иглы инъекционной 0,90x40,0 мм

открывать здесь



LOT 01

Дата стерилизации 02.2024

Годен до 02.2029

ПР 23-05

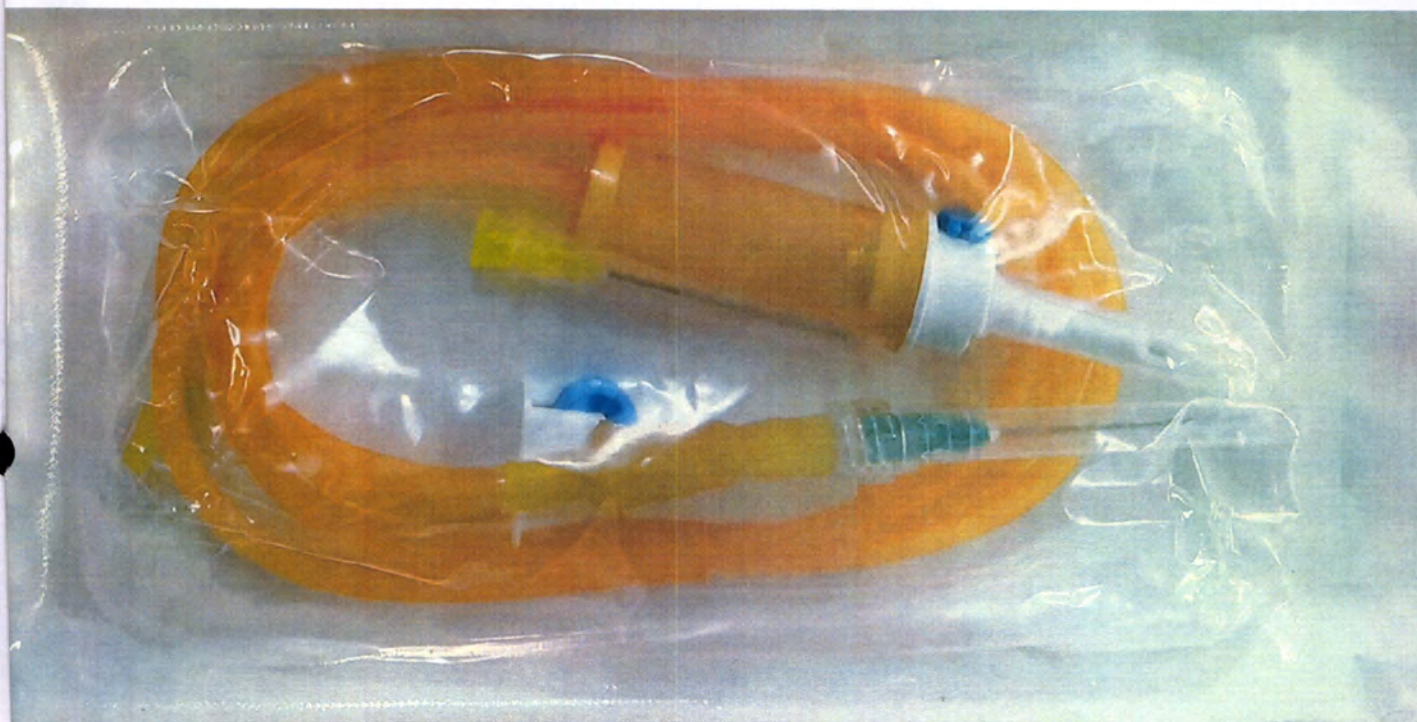


Фото 16. Устройство полимерное для вливания кровезаменителей и инфузионных растворов однократного применения стерильное с наконечником типа «Луер-Лок» ПР 23-05-У. «ПРЕМЬЕР-МЕД» светозащитное с иглами инъекционными (0,80x40,0/0,90x40,0) мм по ТУ 32.50.50-002-25587590-2020. Общий вид в потребительской упаковке.

Прошнуровано и
пронумеровано

17 (семнадцать)

листов

Директор
ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД»

Е.В. ТИТОВА

