

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «УЛЬТРА»



О.Н.Савельев

22 января 2024г.

ИЗДЕЛИЯ ПРОТЕТИЧЕСКИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ДЕНТАЛЬНОЙ
ИМПЛАНТАЦИИ «УЛЬТРАСТОМ» по ТУ 32.50.22-002-94681064-2020

Инструкция по применению, размещаемая на сайте предприя-
тия-изготовителя <http://ultrastom.com>

Изготовитель: ООО «Ультра»

Юр. адрес 192148, г. Санкт-Петербург,

вн. тер. г. муниципальный округ Невская застава, пр-кт Елизарова,

д. 34 литера А, помещ. 1-Н, офис 406

Тел. 8-800-333-5309

32.50.22 ИП

2024

Перв. примен.	Настоящая инструкция по применению (ИП) является документом, устанавливающим правила эксплуатации медицинского изделия «Изделия протетические для систем дентальной имплантации «УЛЬТРАСТОМ» (далее изделия протетические), соблюдение которых обеспечивает поддержание его в постоянной готовности к работе. Назначение: «Изделия протетические для систем дентальной имплантации «УЛЬТРАСТОМ» предназначены для использования во время реставрационных и зуботехнических работ с дентальным имплантатом с целью обеспечения постоянного промежуточного уровня между дентальным имплантатом и окончательным протезом/реставрацией (мостом, одним зубом, покрывным протезом). Прилагаются винты для абатмента. Показания к применению: для восстановления жевательной эффективности при одиночных дефектах зубного ряда, включенных дефектах зубного ряда, концевых дефектах зубного ряда и полной адентии. Противопоказания: - сахарный диабет; - хронические заболевания в стадии декомпенсации; - нарушение коагуляции и гемостаза; - ВИЧ; - психические заболевания; - острые воспалительные заболевания; - аллергические реакции на препараты, применяемые при дентальной имплантации; - лечение препаратами, ухудшающими регенерацию тканей (гормональная и химиотерапия, прием иммунодепрессантов) Побочные действия: - временное нарушение речи; - воспалительные процессы слизистой оболочки полости рта, связанные с токсическим или травматическим действием протеза (пролежни, гингивиты, стоматиты); - аллергические реакции на материалы, из которых изготовлены изделия протетические; Класс в зависимости от потенциального риска применения – 2 а по ГОСТ 31508-2012. Изделия протетические предназначены для применения в стоматологических отделениях специализированных и многопрофильных больниц и клиник, а также в стоматологических кабинетах Потенциальный потребитель – врач – ортопед, прошедший специальную подготовку по эстетическому восстановлению всех групп зубов, профессиональной гигиены полости рта, протезированию несъемному на имплантатах.																																					
	_ прав. №																																					
Подп. и дата																																						
	Инв. № д																																					
Взам. инв. №																																						
	Подп. и дата																																					
в. № подл.																																						
	<table border="1"> <tr> <td colspan="5">32.50.22ИП</td> </tr> <tr> <td>Изм</td> <td>Лист.</td> <td>№ докум.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата.</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td></td> <td>Савельев</td> <td></td> <td>22.01.24</td> </tr> <tr> <td>Пров.</td> <td></td> <td>Савельев</td> <td></td> <td>22.01.24</td> </tr> <tr> <td>Н.контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					32.50.22ИП					Изм	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата.	Разраб.		Савельев		22.01.24	Пров.		Савельев		22.01.24	Н.контр.					<table border="1"> <tr> <td>Лит.</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>2</td> <td>116</td> </tr> </table>			Лит.	Лист	Листов	A	2
32.50.22ИП																																						
Изм	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата.																																		
Разраб.		Савельев		22.01.24																																		
Пров.		Савельев		22.01.24																																		
Н.контр.																																						
Лит.	Лист	Листов																																				
A	2	116																																				
«Изделия протетические для систем дентальной имплантации «УЛЬТРАСТОМ» Инструкция по применению					ООО «Ультра»																																	

1 Описание и работа изделий протетических.

1.1 Описание изделий протетических:

1. Абатмент прямой стандартный, основание с фиксацией, основание без фиксации, основание без фиксации (Sirona), основание с фиксацией (Sirona), абатмент угловой 15°, мультиюнит угловой 17°, мультиюнит угловой 30°, мультиюнит угловой 45°, основание удлиненное с фиксацией, основание удлиненное без фиксации, основание для одиночных конструкций: (код вида 120550)- супраструктура для дентального имплантата, предназначенная для обеспечения постоянного промежуточного уровня между дентальным имплантатом и окончательным протезом/реставрацией (например, мостом, одним зубом, покрывным протезом) и может изготавливаться из различных материалов (титана (Ti), пластика). Включает изделия, приклеиваемые к протезу и/или изделия, которые можно заменить во время циклов очистки. Могут прилагаться винты для абатмента.

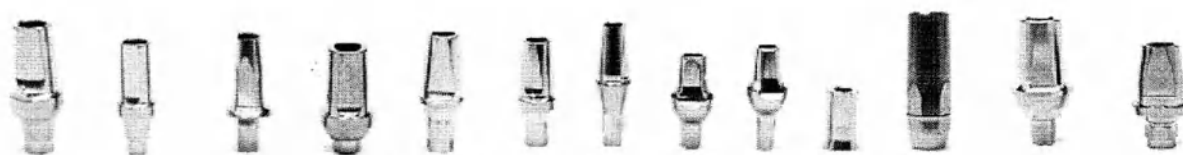


Рис.1 Абатмент прямой стандартный



Рис.2 Абатмент угловой 15 град.



Рис.4 Мультиюнит угловой 17 град.

Рис.5 Мультиюнит угловой 30 град.



Рис.6 Основания с фиксацией.

в.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата	32.50.22 ИП				Лист
									3
 OOO ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU					Дата				



Рис.7 Основания без фиксации.



Рис.8 Основание удлиненное с фиксацией



Рис.9 Основание удлиненное без фиксации



Рис.10 Основание для одиночных конструкций



Рис.11 Винт

Подп. и дата	
Инв. №	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
в. № подл.	

000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAYNADZOR.RU	Дата	

32.50.22 ИП

Таблица 1 – Перечень изделий протетических.

№ п/п	Наименование изделий	№ в каталоге	Масса, г	Рис.
1	Абатмент прямой стандартный для систем дентальной имплантации			
1	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0207	0207	0,25±20%	1
2	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0208	0208	0,3±20%	1
3	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0209	0209	0,37±20%	1
4	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0210	0210	0,44±20%	1
5	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Osstem – REF 0428	0428	0,26±20%	1
6	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Osstem – REF 0427	0427	0,23±20%	1
7	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Osstem – REF 0426	0426	0,20±20%	1
8	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Osstem – REF 0464	0464	0,30±20%	1
9	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Osstem – REF 0465	0465	0,35±20%	1
10	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Osstem – REF 0466	0466	0,37±20%	1
11	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Osstem – REF 0463	0463	0,26±20%	1
12	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Astra Tech – REF 0091	0091	0,22±20%	1
13	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Astra Tech – REF 0135	0135	0,25±20%	1
14	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Astra Tech – REF 0092	0092	0,34±20%	1
15	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Astra Tech – REF 0136	0136	0,58±20%	1
16	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Dentium – REF 0217	0217	0,17±20%	1
17	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Dentium – REF 0218	0218	0,2±20%	1
18	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Astra Tech – REF 0223	0223	0,13±20%	2
19	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Astra Tech – REF 0224	0224	0,17±20%	2
20	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Ankylos:– REF 0230	0230	0,2±20%	3
21	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Ankylos:– REF 0231	0231	0,23±20%	3
22	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Ankylos:– REF 0232	0232	0,27±20%	3
23	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0059	0059	0,23±20%	4
24	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0060	0060	0,35±20%	4
25	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой	0061	0,41±20%	4

32.50.22 ИП

Лист

5

Подп. и дата

Изм. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Ив. № подл.

Подп. и дата
 Инв. №
 Взам. инв. №
 Подп. и дата
 № подл.

	шестигранное соединение – REF 0061			
25	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0062	0062	0,45±20%	4
26	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Mis C1– REF 0306	0306	0,16±20%	5
27	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Mis C1– REF 0314	0314	0,24±20%	5
28	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Mis C1– REF 0298	0298	0,29±20%	5
29	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Mis C1– REF 0299	0299	0,39±20%	5
30	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Mis C1– REF 0300	0300	0,50±20%	5
31	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Mis C1– REF 0301	0301	0,66±20%	5
32	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Replace – REF 0002	0002	0,21±20%	6
33	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Replace – REF 0006	0006	0,29±20%	6
34	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Replace – REF 0003	0003	0,29±20%	6
35	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Replace – REF 0007	0007	0,42±20%	6
36	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Replace – REF 0001	0001	0,16±20%	6
37	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Replace – REF 0005	0005	0,22±20%	6
38	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0073	0073	0,16±20%	7
39	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0074	0074	0,22±20%	7
40	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0075	0075	0,32±20%	7
41	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0076	0076	0,47±20%	7
42	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Ankylos – REF 0233	0233	0,34±20%	8
43	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Ankylos – REF 0234	0234	0,38±20%	8
44	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Ankylos – REF 0235	0235	0,32±20%	9
45	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Ankylos– REF 0236	0236	0,37±20%	9
46	Абатмент прямой стандартный, 43° для мультиюнита – REF 0484	0484	0,19±20%	10
47	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Straumann Synocta – REF 0084	0084	0,21±20%	11
48	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Biomet 3i – REF 0047	0047	0,25±20%	12
49	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Biomet 3i – REF 00279	0279	0,36±20%	12
50	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Biomet 3i – REF 0048	0048	0,37±20%	12
51	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Biomet 3i – REF 0280	0280	0,4±20%	12
52	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой	0101	0,16±20%	13

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № д	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № д	Подп. и дата

	шестигранное соединение – REF 0061			
25	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0062	0062	0,45±20%	4
26	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Mis C1– REF 0306	0306	0,16±20%	5
27	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Mis C1– REF 0314	0314	0,24±20%	5
28	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Mis C1– REF 0298	0298	0,29±20%	5
29	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Mis C1– REF 0299	0299	0,39±20%	5
30	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Mis C1– REF 0300	0300	0,50±20%	5
31	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Mis C1– REF 0301	0301	0,66±20%	5
32	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Replace – REF 0002	0002	0,21±20%	6
33	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Replace – REF 0006	0006	0,29±20%	6
34	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Replace – REF 0003	0003	0,29±20%	6
35	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Replace – REF 0007	0007	0,42±20%	6
36	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Replace – REF 0001	0001	0,16±20%	6
37	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Replace – REF 0005	0005	0,22±20%	6
38	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0073	0073	0,16±20%	7
39	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0074	0074	0,22±20%	7
40	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0075	0075	0,32±20%	7
41	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0076	0076	0,47±20%	7
42	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Ankylos – REF 0233	0233	0,34±20%	8
43	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Ankylos – REF 0234	0234	0,38±20%	8
44	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Ankylos – REF 0235	0235	0,32±20%	9
45	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Ankylos– REF 0236	0236	0,37±20%	9
46	Абатмент прямой стандартный, 43° для мультиюнита – REF 0484	0484	0,19±20%	10
47	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Straumann Synocta – REF 0084	0084	0,21±20%	11
48	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Biomet 3i – REF 0047	0047	0,25±20%	12
49	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Biomet 3i – REF 00279	0279	0,36±20%	12
50	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Biomet 3i – REF 0048	0048	0,37±20%	12
51	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Biomet 3i – REF 0280	0280	0,4±20%	12
52	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой	0101	0,16±20%	13

32.50.22 ИП

	Xive/Friadent – REF 0101			
53	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0258	0258	0,24±20%	13
54	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0102	0102	0,2±20%	13
55	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0259	0259	0,28±20%	13
56	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0103	0103	0,31±20%	13
57	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0260	0260	0,33±20%	13
58	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0261	0261	0,35±20%	13
59	Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0262	0262	0,53±20%	13
II	Основание с фиксацией для систем дентальной имплантации			
60	Основание с фиксацией совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0110	0110	0,09±20%	14
61	Основание с фиксацией совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0111	0111	0,11±20%	14
62	Основание с фиксацией совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0112	0112	0,17±20%	14
63	Основание с фиксацией совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0113	0113	0,19±20%	14
64	Основание с фиксацией совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0081	0081	0,09±20%	15
65	Основание с фиксацией совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0082	0082	0,16±20%	15
66	Основание с фиксацией совместимое с системой Osstem – REF 0429	0429	0,13±20%	16
67	Основание с фиксацией совместимое с системой Osstem – REF 0430	0430	0,14±20%	16
68	Основание с фиксацией совместимое с системой Nobel Replace – REF 0017	0017	0,07±20%	17
69	Основание с фиксацией совместимое с системой Nobel Replace – REF 0018	0018	0,11±20%	17
70	Основание с фиксацией совместимое с системой Nobel Replace – REF 0019	0019	0,15±20%	17
71	Основание с фиксацией совместимое с системой Dentium – REF 0225	0225	0,13±20%	18
72	Основание с фиксацией совместимое с системой Astra Tech – REF 0097	0097	0,1±20%	18
73	Основание с фиксацией совместимое с системой Astra Tech – REF 0098	0098	0,17±20%	18
74	Основание с фиксацией совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0203	0203	0,11±20%	18
75	Основание с фиксацией совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0204	0204	0,12±20%	18
76	Основание с фиксацией совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0090	0090	0,15±20%	19
77	Основание с фиксацией совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0155	0155	0,2±20%	19
78	Основание с фиксацией совместимое с системой Ankylos – REF 0246	0246	0,1±20%	20
79	Основание с фиксацией совместимое с системой Ankylos – REF 0272	0272	0,13±20%	20
80	Основание с фиксацией совместимое с системой	0067	0,09±20%	21

32.50.22 ИП

Лист

7

Подп. и дата

Инв. № д

Взам. инв. №

Подп. и дата

В. № подл.

п.п. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № д	Подп. и дата

в.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № д	Подп. и дата	Подп. и дата

108	Основание без фиксации совместимое с системой Biomet 3i – REF 0057	0057	0,07±20%	28
109	Основание без фиксации совместимое с системой Astra Tech – REF 0228	0228	0,09±20%	29
110	Основание без фиксации совместимое с системой Astra Tech – REF 0099	0099	0,09±20%	29
111	Основание без фиксации совместимое с системой Astra Tech – REF 0100	0100	0,14±20%	29
112	Основание без фиксации совместимое с Dentium – REF 0226	0226	0,11±20%	29
113	Основание без фиксации совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0205	0205	0,1±20%	29
114	Основание без фиксации совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0206	0206	0,1±20%	29
115	Основание без фиксации совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0296	0296	0,06±20%	29
116	Основание без фиксации совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0156	0156	0,08±20%	29
117	Основание без фиксации совместимое с Straumann Bone Level – REF 0157	0157	0,12±20%	29
118	Основание без фиксации совместимое с системой Ankylos – REF 0247	0247	0,1±20%	30
119	Основание без фиксации совместимое с системой Ankylos – REF 0273	0273	0,13±20%	30
120	Основание без фиксации совместимое с системой Mis C1 – REF 0202	0202	0,12±20%	31
121	Основание без фиксации совместимое с системой Mis C1 – REF 0294	0294	0,17±20%	31
122	Основание без фиксации совместимое с системой Mis C1 – REF 0588	0588	0,15±20%	31
123	Основание без фиксации совместимое с системой Mis C1 – REF 0587	0587	0,17±20%	31
124	Основание без фиксации совместимое с системой Mis C1 – REF 0767	0767	0,16±20%	31
125	Основание без фиксации совместимое с системой Mis C1 – REF 0768	0768	0,18±20%	31
126	Основание без фиксации совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0284	0284	0,11±20%	31
127	Основание без фиксации совместимое с системой Osstem – REF 0478	0478	0,11±20%	32
128	Основание без фиксации совместимое с системой Osstem – REF 0433	0433	0,14±20%	32
129	Основание без фиксации совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0159	0159	0,14±20%	33
130	Основание без фиксации совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0160	0160	0,15±20%	33
131	Основание без фиксации конус 43° для мультиюнита REF 0477	0477	0,1±20%	34
132	Основание без фиксации конус 30° для мультиюнита совместимое с системой Ankylos – REF 0483	0483	0,12±20%	34
133	Основание без фиксации совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0158	0158	0,07±20%	35
IV	Основание без фиксации (Sirona) для систем дентальной имплантации			
134	Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0200	0200	0,09±20%	36
135	Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой	0201	0,12±20%	36

32.50.22 ИП

Лист

9

в.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № д	Подп. и дата	Инв. № д	Подп. и дата

	шестигранное соединение – REF 0201			
136	Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Nobel Replace – REF 0171	0171	0,08±20%	36
137	Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Nobel Replace – REF 0267	0267	0,09±20%	36
138	Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Nobel Replace – REF 0268	0268	0,11±20%	36
139	Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой с Xive/Friadent – REF 0183	0183	0,1±20%	36
140	Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой с Xive/Friadent – REF 0184	0184	0,11±20%	36
141	Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой с Xive/Friadent – REF 0193	0193	0,14±20%	36
142	Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Biomet 3i – REF 0181	0181	0,11±20%	36
143	Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Biomet 3i – REF 0182	0182	0,12±20%	36
144	Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Ankylos – REF 0278	0278	0,13±20%	37
145	Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Ankylos – REF 0415	0415	0,16±20%	37
146	Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Dentium – REF 0176	0176	0,14±20%	38
147	Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Astra Tech – REF 0174	0174	0,12±20%	38
148	Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Astra Tech – REF 0175	0175	0,15±20%	38
149	Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0172	0172	0,14±20%	38
150	Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0173	0173	0,14±20%	38
151	Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Osstem – REF 0489	0489	0,12±20%	38
152	Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Osstem – REF 0491	0491	0,14±20%	38
153	Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0195	0195	0,1±20%	38
154	Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0197	0197	0,11±20%	38
155	Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0199	0199	0,13±20%	39
V	Основание с фиксацией (Sirona) для систем дентальной имплантации			
156	Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Astra Tech – REF 0162	0162	0,13±20%	40
157	Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Astra Tech – REF 0163	0163	0,17±20%	40
158	Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Dentium – REF 0270	0270	0,17±20%	40
159	Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0164	0164	0,15±20%	40
159	Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0165	0165	0,15±20%	40
160	Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Osstem – REF 0488	0488	0,14±20%	40
161	Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Osstem – REF 0490	0490	0,14±20%	40

Подп. и дата		Инв. № д	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

162	Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Biomet 3i – REF 0169	0169	0,11±20%	41
163	Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Biomet 3i – REF 0170	0170	0,14±20%	41
164	Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Ankylos – REF 0277	0277	0,14±20%	42
165	Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Ankylos – REF 0414	0414	0,15±20%	42
166	Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0269	0269	0,1±20%	43
167	Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0161	0161	0,12±20%	43
168	Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0194	0194	0,13±20%	44
169	Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0196	0196	0,18±20%	44
170	Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Nobel Replace – REF 0264	0264	0,1±20%	45
171	Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Nobel Replace – REF 0265	0265	0,13±20%	45
172	Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Nobel Replace – REF 0266	0266	0,16±20%	45
173	Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0198	0198	0,14±20%	46
174	Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0166	0166	0,09±20%	47
175	Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0167	0167	0,12±20%	47
176	Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0168	0168	0,18±20%	47
VI Абатмент угловой 15° для систем дентальной имплантации				
177	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0008	0008	0,26±20%	56
178	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0009	0009	0,35±20%	56
179	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0010	0010	0,34±20%	56
180	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0011	0011	0,48±20%	56
181	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0012	0012	0,61±20%	56
182	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Biomet 3i – REF 0049	0049	0,26±20%	54
183	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Biomet 3i – REF 0050	0050	0,42±20%	54
184	Абатмент угловой 15° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0063	0063	0,33±20%	51
185	Абатмент угловой 15° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0064	0064	0,5±20%	51
186	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0077	0077	0,15±20%	57
187	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0078	0078	0,21±20%	57
188	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Straumann Synocta – REF 0086	0086	0,2±20%	52
189	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Astra Tech	0093	0,22±20%	50

32.50.22 ИП

Лист

11

	– REF 0093			
190	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Astra Tech – REF 0094	0094	0,43±20%	50
191	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0104	0104	0,27±20%	58
192	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0105	0105	0,32±20%	58
193	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0106	0106	0,33±20%	58
194	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0133	0133	0,7±20%	56
195	Абатмент угловой 15° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0153	0153	0,38±20%	51
196	Абатмент угловой 15° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0154	0154	0,57±20%	51
197	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0211	0211	0,19±20%	50
198	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0212	0212	0,24±20%	50
199	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0213	0213	0,26±20%	50
200	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0214	0214	0,36±20%	50
201	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Dentium – REF 0221	0221	0,33±20%	50
202	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Dentium – REF 0222	0222	0,36±20%	50
203	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Ankylos – REF 0237	0237	0,19±20%	53
204	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Ankylos – REF 0238	0238	0,21±20%	53
205	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Ankylos – REF 0239	0239	0,25±20%	53
206	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Ankylos – REF 0242	0242	0,26±20%	71
207	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Ankylos – REF 0243	0243	0,32±20%	71
208	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Ankylos – REF 0244	0244	0,3±20%	70
209	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Ankylos – REF 0245	0245	0,32±20%	70
210	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Astra Tech – REF 0263	0263	0,26±20%	50
211	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Biomet 3i – REF 0281	0281	0,54±20%	54
212	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0282	0282	0,36±20%	57
213	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0302	0302	0,56±20%	58
214	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0303	0303	0,39±20%	58
215	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0304	0304	0,36±20%	58
216	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0305	0305	0,45±20%	58
217	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Mis C1 –	0310	0,3±20%	55

32.50.22 ИП

Лист

12

Подп. и дата

Инв. № д

Взам. инв. №

Подп. и дата

В. № подл.

Подп. и дата	
Инв. № д	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № посл.	

	REF 0310			
218	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Mis C1 – REF 0311	0311	0,38±20%	55
219	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Mis C1 – REF 0312	0312	0,48±20%	55
220	Абатмент угловой 15° совместимый с системой Mis C1 – REF 0313	0313	0,61±20%	55
VII	Мультиюнит угловой 17° для систем дентальной имплантации			
221	Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0909	0909	0,18±20%	73
222	Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0910	0910	0,23±20%	73
223	Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0936	0936	0,23±20%	73
224	Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0937	0937	0,24±20%	73
225	Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Dentium – REF 0911	0911	0,24±20%	74
226	Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Dentium – REF 0912	0912	0,29±20%	74
227	Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0324	0324	0,23±20%	72
228	Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0325	0325	0,24±20%	72
229	Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0334	0334	0,15±20%	61
230	Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0335	0335	0,23±20%	61
231	Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0338	0338	0,21±20%	61
232	Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0339	0339	0,23±20%	61
233	Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0348	0348	0,18±20%	60
234	Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0349	0349	0,23±20%	60
235	Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0352	0352	0,24±20%	60
236	Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0353	0353	0,29±20%	60
237	Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0362	0362	0,18±20%	59
238	Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0363	0363	0,23±20%	59
239	Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0366	0366	0,24±20%	59
240	Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0367	0367	0,25±20%	59
VIII	Мультиюнит угловой 30° для систем дентальной имплантации			
241	Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0326	0326	0,16±20%	76
242	Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0327	0327	0,20±20%	76
243	Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0336	0336	0,16±20%	63

32.50.22 ИП

Лист

13

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № д	Подп. и дата	Подп. и дата

244	Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0337	Nobel	0337	0,20±20%	63
245	Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0340	Nobel	0340	0,20±20%	63
246	Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0341	Nobel	0341	0,22±20%	63
247	Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединение – REF 0350		0350	0,16±20%	62
248	Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединение – REF 0351		0351	0,20±20%	62
249	Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединение – REF 0354		0354	0,24±20%	62
250	Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединение – REF 0355		0355	0,31±20%	62
251	Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0364	Astra	0364	0,16±20%	78
252	Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0365	Astra	0365	0,20±20%	78
253	Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0368	Astra	0368	0,20±20%	78
254	Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0369	Astra	0369	0,22±20%	78
255	Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Dentium – REF 0913		0913	0,16±20%	77
256	Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Dentium – REF 0914		0914	0,20±20%	77
257	Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0915		0915	0,24±20%	75
258	Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0916		0916	0,31±20%	75
259	Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0938		0938	0,20±20%	75
260	Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0939		0939	0,22±20%	75
IX Мультиюнит угловой 45° для систем дентальной имплантации					
261	Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0917		0917	0,20±20%	81
262	Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0935		0935	0,22±20%	81
263	Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0940		0940	0,22±20%	81
264	Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0941		0941	0,20±20%	81
265	Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Dentium – REF 0918		0918	0,20±20%	80
266	Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Dentium – REF 0934		0934	0,22±20%	80
267	Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0919		0919	0,22±20%	79
268	Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0932		0932	0,20±20%	79
269	Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0933		0933	0,20±20%	79
270	Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0920		0920	0,16±20%	79
271	Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой		0947	0,20±20%	82

32.50.22 ИП

Лист

14

	шестигранное соединение – REF 0947			
272	Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0948	0948	0,22±20%	82
273	Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0949	0949	0,22±20%	82
274	Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0950	0950	0,20±20%	82
275	Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0943	0943	0,16±20%	83
276	Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0944	0944	0,20±20%	83
277	Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0945	0945	0,22±20%	83
278	Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0946	0946	0,22±20%	83
X	Основание удлиненное с фиксацией для систем дентальной имплантации			
279	Основание удлиненное с фиксацией совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0283	0283	0,18±20%	64
280	Основание удлиненное с фиксацией совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0285	0285	0,12±20%	65
281	Основание удлиненное с фиксацией совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0287	0287	0,16±20%	65
282	Основание удлиненное с фиксацией совместимое с Nobel Replace – REF 0289	0289	0,16±20%	66
283	Основание удлиненное с фиксацией совместимое с системой Nobel Replace – REF 0846	0846	0,14±20%	66
XI	Основание удлиненное без фиксации для систем дентальной имплантации			
284	Основание удлиненное без фиксации шестигранное соединение – REF 0286	0286	0,12±20%	67
285	Основание удлиненное без фиксации совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0288	0288	0,15±20%	67
286	Основание удлиненное без фиксации совместимое с системой Nobel Replace – REF 0492	0492	0,13±20%	67
287	Основание удлиненное без фиксации совместимое с системой Nobel Replace – REF 0290	0290	0,13±20%	67
288	Основание удлиненное без фиксации совместимое с системой Nobel Replace – REF 0493	0493	0,15±20%	67
XII	Основание для одиночных конструкций для систем дентальной имплантации			
289	Основание для одиночных конструкций совместимое с системой Nobel Conical Connection ND – REF 0416	0416	0,06±20%	68
290	Основание для одиночных конструкций совместимое с системой Nobel Conical Connection ND – REF 0487	0487	0,09±20%	68
291	Основание для одиночных конструкций совместимое с системой Nobel Replace – REF 0024	0024	0,02±20%	69
292	Основание для одиночных конструкций совместимое с системой Nobel Replace – REF 0025	0025	0,05±20%	68
293	Основание для одиночных конструкций совместимое с системой Nobel Replace – REF 0026	0026	0,07±20%	68
XIII	Винт для систем дентальной имплантации			
294	Винт M1,6 для мультиюнита – REF 0085	0085	0,04±20%	48
295	Винт M1,8 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0119	0119	0,08±20%	49
296	Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0120	0120	0,11±20%	49
297	Винт M1,8 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0122	0122	0,06±20%	49

32.50.22 ИП

Лист

15

298	Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0123	0123	0,1±20%	49
299	Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0929	0929	0,1±20%	49
300	Винт M1.8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0134	0134	0,07±20%	49
301	Винт M1.6 совместимый с системой Biomet 3i – REF 0137	0137	0,06±20%	48
302	Винт M1.6 совместимый с системой Astra Tech – REF 0138	0138	0,06±20%	48
303	Винт M2 совместимый с системой Astra Tech – REF 0139	0139	0,11±20%	49
304	Винт M1.6 совместимый с системой Astra Tech – REF 0811	0811	0,07±20%	49
305	Винт M2 совместимый с системой Astra Tech – REF 0812	0812	0,06±20%	49
306	Винт M1.6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140	0140	0,07±20%	48
307	Винт M1.6 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0215	0215	0,05±20%	49
308	Винт M2 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0216	0216	0,07±20%	49
309	Винт M1.8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248	0248	0,08±20%	48
310	Винт M2 совместимый с системой Dentium – REF 0249	0249	0,11±20%	48
311	Винт M2 совместимый с системой Dentium – REF 0930	0930	0,11±20%	48
312	Винт M1.8 совместимый с системой Straumann Synocta – REF 0254	0254	0,03±20%	48
313	Винт M2 совместимый с системой Straumann Synocta – REF 0255	0255	0,09±20%	48
314	Винт M1.6 совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0256	0256	0,05±20%	49
315	Винт M1.4 совместимый с системой Astra Tech – REF 0257	0257	0,05±20%	48
316	Винт M1.6 совместимый с системой шестигранное соединение и Mis C1 – REF 0297	0297	0,05±20%	49
317	Винт M1.4 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0307	0307	0,03±20%	49
318	Винт M1.4 для мультиюнита – REF 0374-01	0374-01	0,02±20%	48
319	Винт M1.4 для мультиюнита – REF 0374-02	0374-02	0,02±20%	48
320	Винт M1.4 для мультиюнита – REF 0374-03	0374-03	0,02±20%	48
321	Винт M1.6 совместимый с системой Osstem – REF 0431	0431	0,08±20%	48
322	Винт M2 совместимый с системой Osstem – REF 0432	0432	0,09±20%	48
323	Винт M1.8 совместимый с системой Mis C1 – REF 0462	0462	0,06±20%	49
324	Винт M1.8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0504	0504	0,05±20%	49
333	Винт M1.6 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0561	0561	0,05±20%	49
334	Винт M2 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0560	0560	0,05±20%	49
335	Винт M1.6 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0813	0813	0,06±20%	49
336	Винт M2 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0814	0814	0,09±20%	49
338	Винт M1.6 совместимый с системой Osstem – REF 0931	0931	0,09±20%	49

32.50.22 ИП

Лист

16

Подп. и дата

Инв. № д

Взам. инв. №

Подп. и дата

в. № подл.

339	Винт M2 совместимый с системой Osstem – REF 0942	0942	0,07±20%	49
-----	---	------	----------	----

.1.2 Основные, габаритные размеры и масса:

- основные, габаритные размеры и масса указаны в таблицах 1...83 и на рисунках 1...84

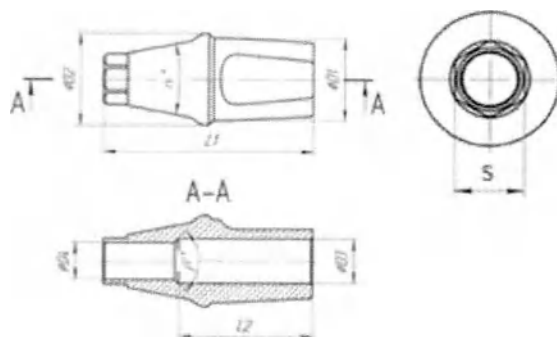


Рисунок 1 Абатмент прямой стандартный

Таблица 2 Абатмент прямой стандартный

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	S мм
0207	24°-30'	70°*	3,81*	4,50±0,02	10,50±0,02	2,30+0,04	1,60+0,04	7,10±0,05	2,24-0,02
0208	24°-30'	70°*	3,81*	4,50±0,02	12,00±0,02	2,30+0,04	1,60+0,04	8,60±0,05	2,24-0,02
0209	24°-30'	70°*	4,41*	5,50±0,02	10,68±0,02	2,60+0,04	2,05+0,04	7,28±0,05	2,65-0,02
0210	24°-30'	70°*	4,42*	5,50±0,02	12,25±0,02	2,60+0,04	2,05+0,04	8,85±0,05	2,65-0,02
0428	22°-30'	90°*	3,80*	4,58±0,02	11,10±0,02	2,30+0,04	1,65+0,04	7,42±0,05	2,09-0,02
0427	22°-30'	90°*	3,80*	4,58±0,02	10,10±0,02	2,30+0,04	1,65+0,04	6,42±0,05	2,09-0,02
0426	22°-30'	90°*	3,80*	4,58±0,02	9,10±0,02	2,30+0,04	1,65+0,04	5,42±0,05	2,09-0,02
0464	22°-30'	90°*	4,00*	4,60±0,02	11,00±0,02	2,40+0,04	2,00+0,04	7,05±0,05	2,49-0,02
0465	22°-30'	90°*	4,50*	5,00±0,02	10,00±0,02	2,40+0,04	2,00+0,04	6,05±0,05	2,49-0,02
0466	22°-30'	90°*	4,50*	5,00±0,02	11,00±0,02	2,40+0,04	2,00+0,04	7,05±0,05	2,49-0,02
0463	22°-30'	90°*	4,00*	4,60±0,02	10,00±0,02	2,40+0,04	2,00+0,04	6,05±0,05	2,49-0,02
0091	22°-30'	180°*	3,36*	4,50±0,02	11,00±0,02	2,40+0,04	1,65+0,04	7,70±0,05	2,09-0,02
0135	22°-30'	180°*	3,36*	4,50±0,02	12,40±0,02	2,40+0,04	1,65+0,04	9,90±0,05	2,09-0,02
0092	22°-30'	180°*	4,00*	4,98±0,02	12,30±0,02	2,55+0,04	2,00+0,04	7,80±0,05	2,49-0,02
0136	22°-30'	180°*	4,49*	5,99±0,02	13,75±0,02	2,55+0,04	2,00+0,04	9,25±0,05	2,49-0,02
0217	22°-30'	120°*	3,60*	4,50±0,02	9,20±0,02	2,35+0,04	2,05+0,04	4,35±0,05	2,49-0,02
0218	22°-30'	120°*	3,60*	4,50±0,02	10,16±0,02	2,35+0,04	2,05+0,04	5,31±0,05	2,49-0,02

Подп. и дата

Изм. № д

Взам. инв. №

Подп. и дата

Ив. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

17

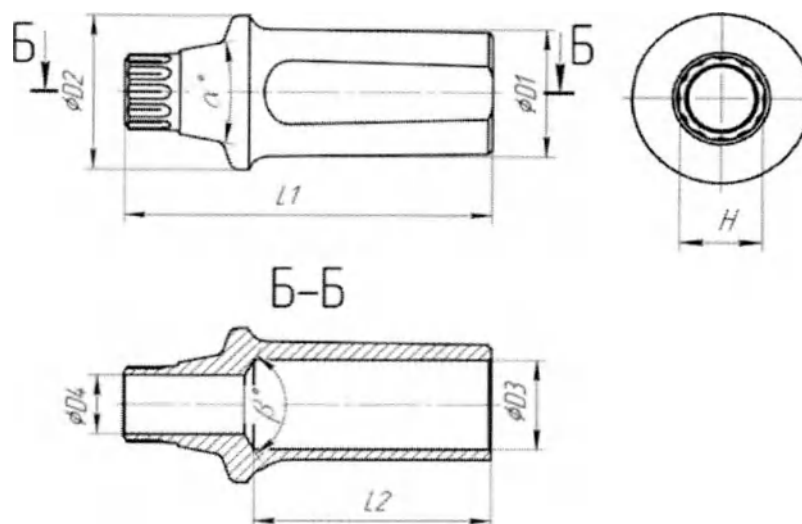


Рисунок 2 Абатмент прямой стандартный

Таблица 3 Абатмент прямой стандартный

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	H мм
0223	22°-30'	180°*	3,14*	3,80±0,02	8,76±0,02	2,20+0,04	1,45+0,04	5,66±0,05	1,76-0,02
0224	22°-30'	180°*	3,14*	3,80±0,02	10,76±0,02	2,20+0,04	1,45+0,04	7,66±0,05	1,76-0,02

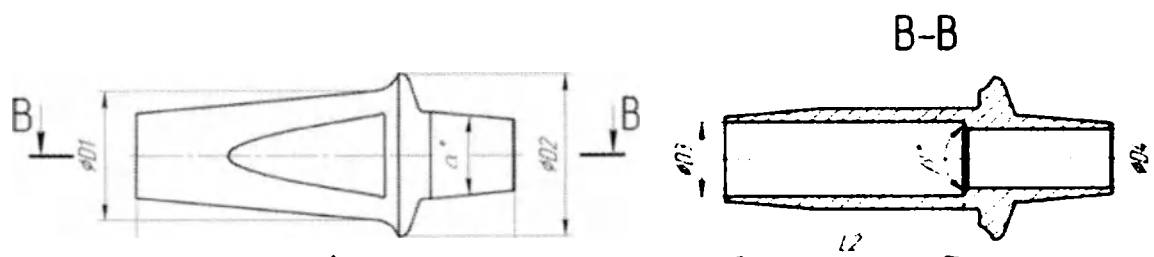


Рисунок 3 Абатмент прямой стандартный

Таблица 4 Абатмент прямой стандартный

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм
0230	11°-30'	120°*	3,82*	4,80±0,02	10,80±0,02	2,20+0,04	1,74+,02	6,65±0,05
0231	11°-30'	120°*	3,86*	5,40±0,02	11,05±0,02	2,20+0,04	1,74+,02	6,97±0,05
0232	11°-30'	120°*	3,86*	5,40±0,02	13,05±0,02	2,20+0,04	1,74+,02	8,90±0,05

Подп. и дата

Инт. № д

Взам. инв. №

Подп. и дата

Чл. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

18

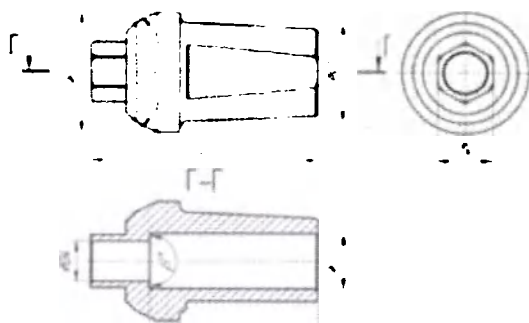


Рисунок 4 Абатмент прямой стандартный

Таблица 5 Абатмент прямой стандартный

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	S мм
0059	90°-30'	180°*	3,85*	4,50±0,02	10,00±0,02	2,45+0,04	1,85+0,04	7,60±0,05	2,42-0,02
0060	90°-30'	180°*	3,88*	4,50±0,02	12,00±0,02	2,45+0,04	1,85+0,04	9,60±0,05	2,42-0,02
0061	90°-30'	180°*	4,49*	5,50±0,02	10,00±0,02	2,55+0,04	1,85+0,04	7,40±0,05	2,42-0,02
0062	90°-30'	180°*	4,46*	5,50±0,02	11,00±0,02	2,55+0,04	1,85+0,04	8,40±0,05	2,42-0,02

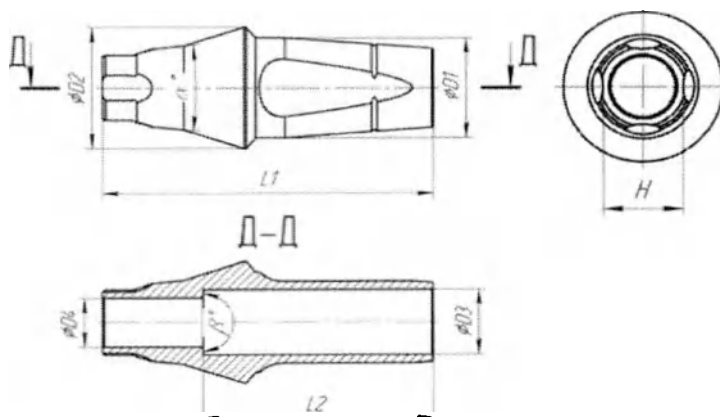


Рисунок 5 Абатмент прямой стандартный

Таблица 6 Абатмент прямой стандартный

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	H мм
0306	12°-30'	180°*	3,30*	4,00±0,02	10,50±0,02	2,15+0,04	1,62+0,04	7,30±0,05	2,00-0,02
0314	12°-30'	180°*	3,45*	4,00±0,02	12,50±0,02	2,15+0,04	1,62+0,04	9,30±0,05	2,00-0,02
0298	12°-30'	180°*	4,20*	4,50±0,02	11,10±0,02	2,22+0,04	1,85+0,04	8,25±0,05	2,25-0,02
0299	12°-30'	180°*	4,20*	4,50±0,02	13,10±0,02	2,22+0,04	1,85+0,04	10,25±0,05	2,25-0,02
0300	12°-30'	180°*	4,50*	5,50±0,02	11,00±0,02	2,22+0,04	1,85+0,04	8,40±0,05	2,90-0,02
0301	12°-30'	180°*	4,50*	5,50±0,02	13,00±0,02	2,22+0,04	1,85+0,04	10,40±0,05	2,90-0,02

Подп. и дата

Инв. № д

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

19

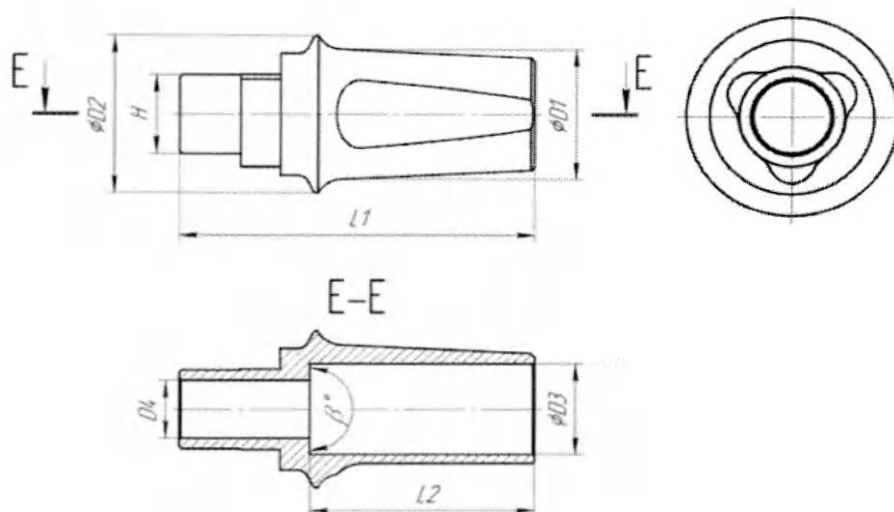


Рисунок 6 Абатмент прямой стандартный

Таблица 7 Абатмент прямой стандартный

№ в каталоге	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	H мм
0002	180°*	3,85*	4,50±0,02	10,30±0,02	2,60+0,04	2,02+0,04	5,68±0,05	2,65-0,02
0006	180°*	3,85*	4,50±0,02	12,30±0,02	2,60+0,04	2,02+0,04	7,68±0,05	2,65-0,02
0003	180°*	4,16*	5,00±0,02	10,80±0,02	2,60+0,04	2,02+0,04	6,20±0,05	2,88-0,02
0007	180°*	4,16*	5,00±0,02	12,80±0,02	2,60+0,04	2,02+0,04	8,20±0,05	2,88-0,02
0001	180°*	3,71*	4,50±0,02	9,84±0,02	2,60+0,04	1,85+0,04	6,22±0,05	2,25-0,02
0005	180°*	3,71*	4,50±0,02	11,84±0,02	2,60+0,04	1,85+0,04	8,22±0,05	2,25-0,02

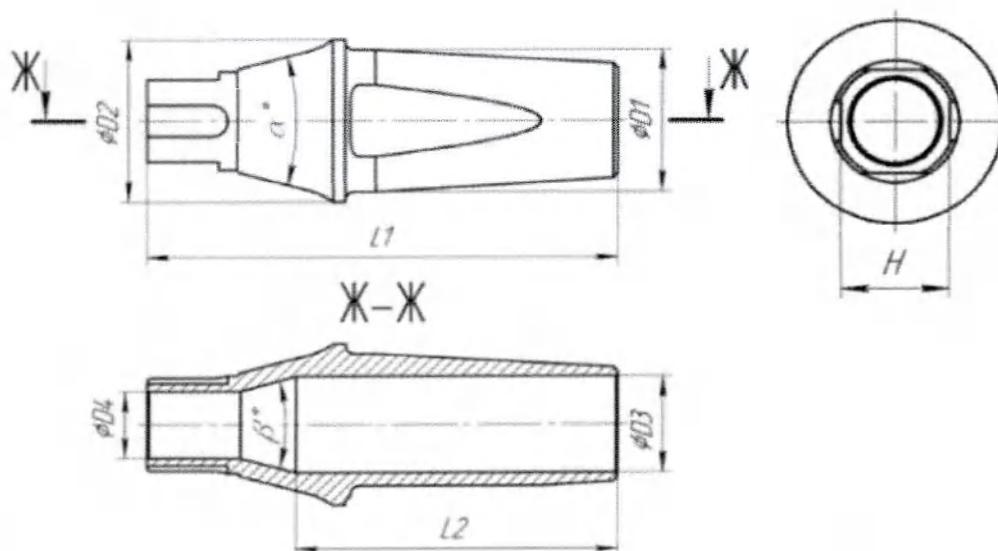


Рисунок 7 Абатмент прямой стандартный

Таблица 8 Абатмент прямой стандартный

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	H мм
0073	30°-30'	30°*	3,40*	3,90±0,02	11,00±0,02	2,30+0,02	1,60+0,04	7,50±0,05	1,97-0,02
0074	30°-30'	30°*	3,37*	4,00±0,02	13,00±0,02	2,30+0,04	1,60+0,04	9,50±0,05	1,97-0,02
0075	30°-30'	30°*	4,10*	5,00±0,02	12,50±0,02	2,30+0,04	1,60+0,04	7,20±0,05	2,40-0,02
0076	30°-30'	30°*	4,10*	5,00±0,02	15,00±0,02	2,30+0,04	1,60+0,04	9,70±0,05	2,40-0,02

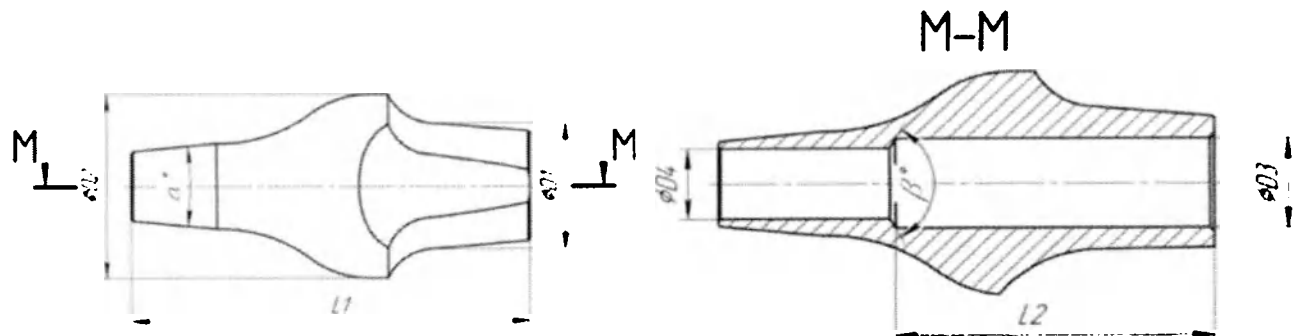


Рисунок 8 Абатмент прямой стандартный

Таблица 9 Абатмент прямой стандартный

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм
0233	11°-30	120°*	3,76*	5,50±0,02	9,50±0,02	2,20+0,04	1,74+0,02	5,87±0,05
0234	11°-30	120°*	3,76*	5,50±0,02	11,46±0,02	2,20+0,04	1,74+0,02	7,33±0,05

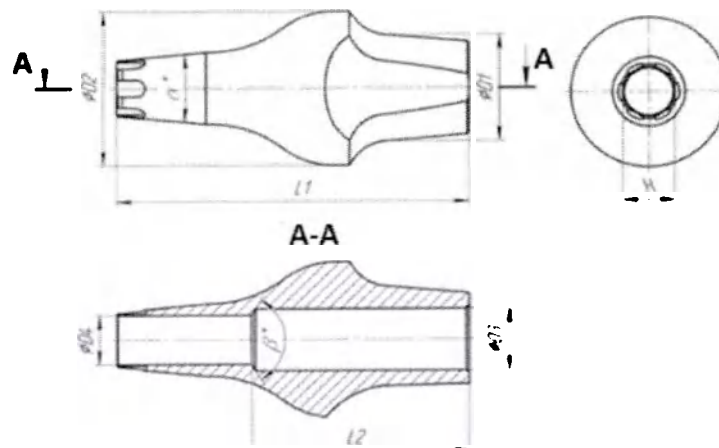


Рисунок 9 Абатмент прямой стандартный

Подп. и дата	
Изм. № д	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
в.№ подл.	

Таблица 10 Абатмент прямой стандартный

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	H мм
0235	11°-30	120°*	3,76*	5,50 $\pm 0,02$	10,60 $\pm 0,02$	2,20 $+0,04$	1,74 $+0,02$	5,87 $\pm 0,05$	1,82- 0,02
0236	11°-30	120°*	3,76*	5,50 $\pm 0,02$	12,10 $\pm 0,02$	2,20 $+0,04$	1,74 $+0,02$	7,33 $\pm 0,05$	1,82- 0,02

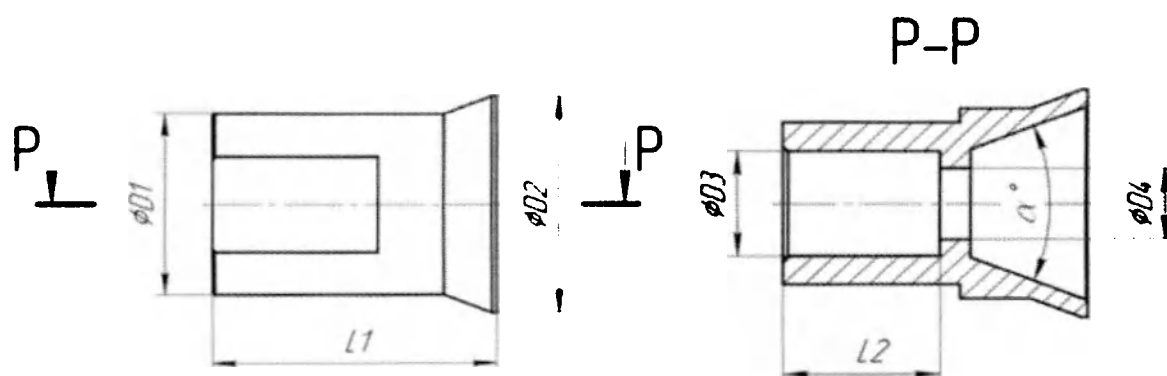


Рисунок 10 Абатмент прямой конус 43° для мультиюнита

Таблица 11 Абатмент прямой конус 43° для мультиюнита

№ в каталоге	α°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм
0484	43°*	4,00 $\pm 0,02$	4,80 $\pm 0,02$	6,00 $\pm 0,02$	2,20 $+0,04$	1,50 $+0,07$	3,10 $\pm 0,05$

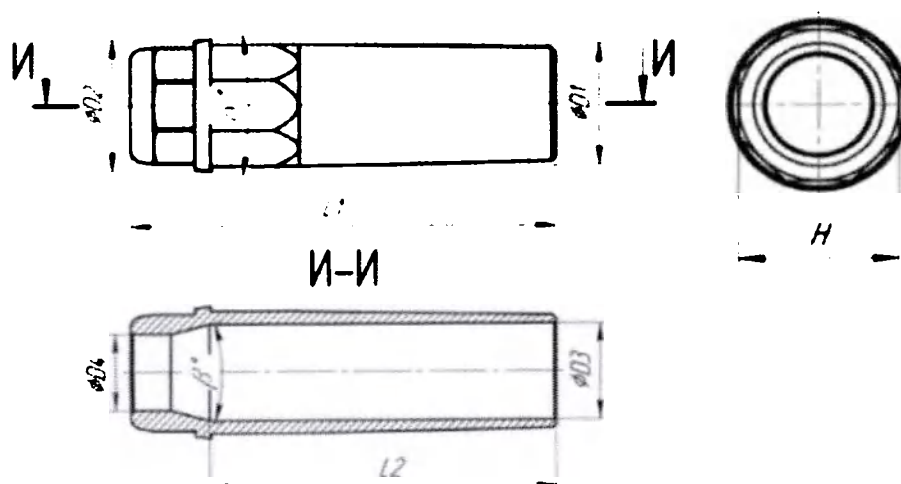


Рисунок 11 Абатмент прямой стандартный

Подп. и дата

Изм. № д

Взам. инв. №

Подп. и дата

в.№ подл.

32.50.22 ИП

Лист

22

Таблица 12 Абатмент прямой стандартный

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	H мм
0084	16°-30'	30°*	3,23*	3,50 ±0,02	10,90 ±0,02	2,55 +0,04	2,02 +0,04	8,90 ±0,05	3,09+0,01-0,005

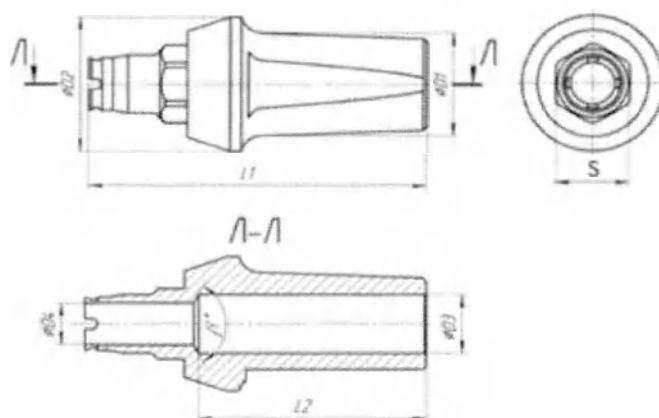


Рисунок 12 Абатмент прямой стандартный

Таблица 13 Абатмент прямой стандартный

№ в каталоге	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	S мм
0047	120°*	3,61*	4,39±0,02	12,66±0,02	2,26+0,04	1,60+0,04	8,27±0,02	2,17-0,02
0279	120°*	3,61*	4,39±0,02	14,65±0,02	2,26+0,04	1,60+0,04	10,31±0,05	2,17-0,02
0048	120°*	3,96*	5,19±0,02	12,64±0,02	2,26+0,04	1,60+0,04	8,40±0,05	2,71-0,02
0280	120°*	3,96*	5,19±0,02	12,65±0,02	2,26+0,04	1,60+0,04	10,48±0,05	2,71-0,02

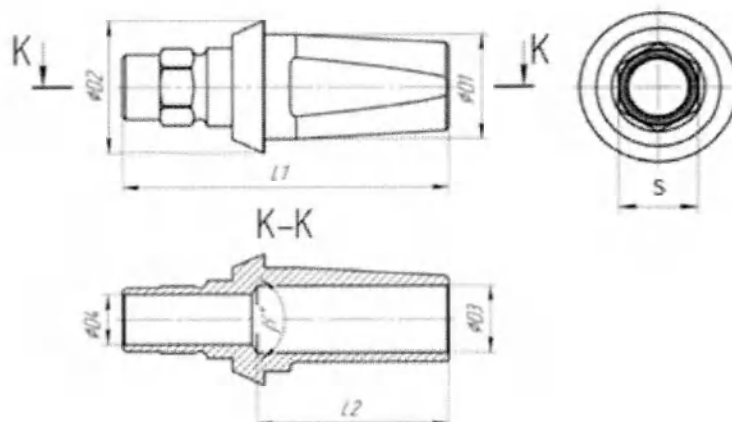


Рисунок 13 Абатмент прямой стандартный

Таблица 14 Абатмент прямой стандартный

№ в каталоге	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	S мм
0101	120°*	3,40*	4,30±0,02	10,30±0,02	2,20+0,04	1,65+0,04	6,04±0,05	2,20-0,02
0258	120°*	3,40*	4,30±0,02	12,30±0,02	2,20+0,04	1,65+0,04	8,04±0,05	2,20-0,02
0102	120°*	3,40*	4,30±0,02	10,20±0,02	2,20+0,04	1,65+0,04	5,94±0,05	2,49-0,02
0259	120°*	3,40*	4,30±0,02	12,20±0,02	2,20+0,04	1,65+0,04	7,94±0,05	2,49-0,02
0103	120°*	4,00*	4,90±0,02	10,20±0,02	2,20+0,04	1,65+0,04	5,94±0,05	2,49-0,02

32.50.22 ИП

Лист

23

0260	120°*	4,00*	4,90±0,02	12,20±0,02	2,20+0,04	1,65+0,04	7,94±0,05	2,49-0,02
0261	120°*	4,60*	5,90±0,02	10,22±0,02	2,20+0,04	1,65+0,04	5,96±0,05	2,49-0,02
0262	120°*	4,60*	5,90±0,02	12,20±0,02	2,20+0,04	1,65+0,04	7,94±0,05	2,49-0,02

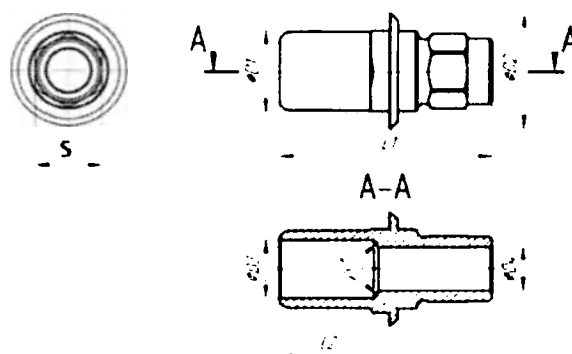


Рисунок 14. Основание с фиксацией.

Таблица 15 Основание с фиксацией.

№ в каталоге	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	S мм
0110	120°*	3,02±0,02	3,90±0,02	7,80±0,02	2,20+0,04	1,65+0,04	3,54±0,05	2,20-0,02
0111	120°*	3,02±0,02	4,30±0,02	7,70±0,02	2,20+0,04	1,65+0,04	3,44±0,05	2,49-0,02
0112	120°*	3,34±0,02	5,50±0,02	8,05±0,02	2,20+0,04	1,65+0,04	3,79±0,05	2,49-0,02
0113	120°*	3,40±0,02	6,50±0,02	8,05±0,02	2,20+0,04	1,65+0,04	3,79±0,05	2,49-0,02

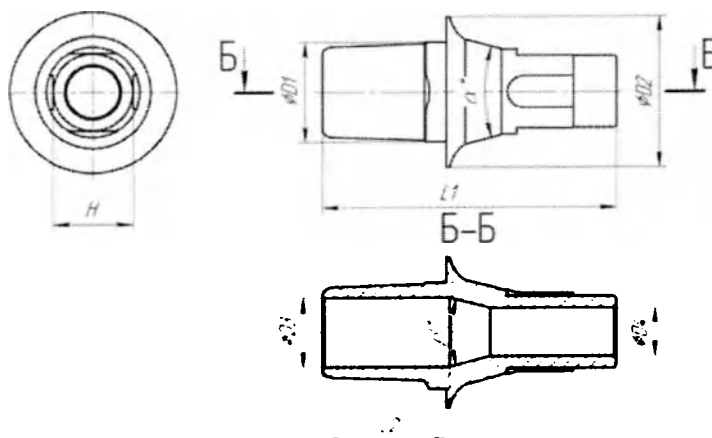


Рисунок 15 Основание с фиксацией.

Таблица 16 Основание с фиксацией.

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	H мм
0081	30°+30'	30°*	3,04±0,02	4,10±0,02	7,70±0,02	2,30+0,04	1,60+0,04	4,15±0,05	1,97-0,02
0082	30°+30'	30°*	3,30±0,02	5,00±0,02	9,40±0,02	2,30+0,04	1,60+0,04	4,10±0,05	2,40-0,02

Подп. и дата

Инв. № д

Взам. инв. №

Подп. и дата

в. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

24

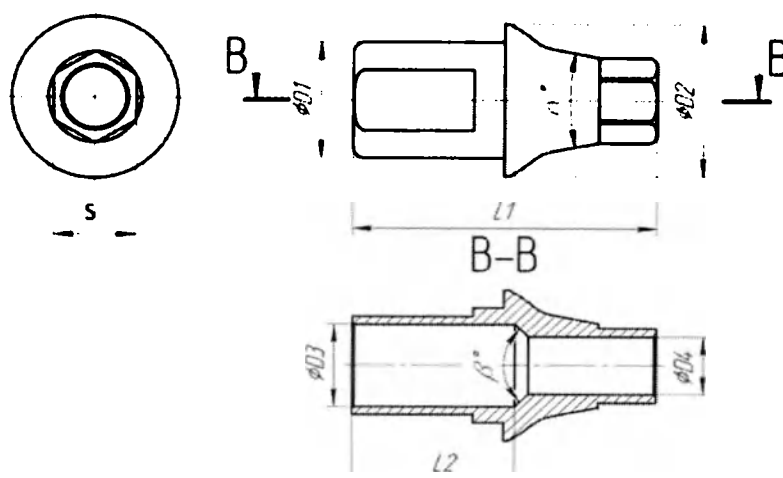


Рисунок 16. Основание с фиксацией.

Таблица 17 Основание с фиксацией.

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	S мм
0429	22°30'	90°*	3,20 ±0,02	4,20 ±0,02	7,98 ±0,02	2,30 +0,04	1,62+0,04	4,30 ±0,05	2,09- 0,02
0430	22°30'	90°*	3,40 ±0,02	4,40 ±0,02	7,66 ±0,02	2,40 +0,04	2,00+0,04	3,70 ±0,05	2,49- 0,02

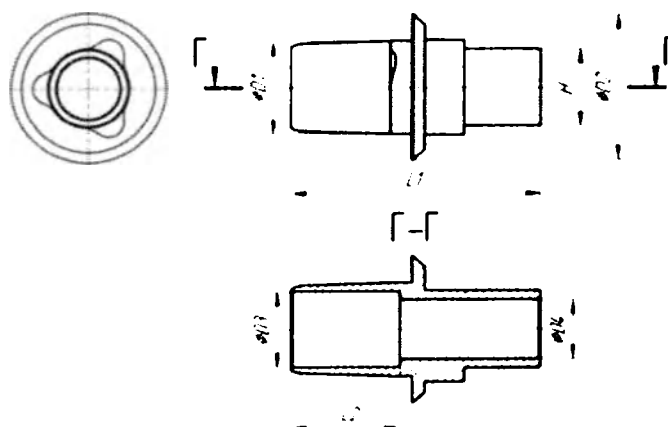


Рисунок 17. Основание с фиксацией.

Таблица 18 Основание с фиксацией.

№ в каталоге	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	H мм
0017	180°*	3,20±0,02	4,40±0,02	7,22±0,02	2,60+0,04	1,85+0,04	3,60±0,05	2,25-0,02
0018	180°*	3,20±0,02	5,00±0,02	8,22±0,02	2,60+0,04	2,02+0,04	3,60±0,05	2,65-0,02
0019	180°*	3,40±0,02	5,50±0,02	8,20±0,02	2,60+0,04	2,02-0,04	3,60±0,05	2,88-0,02

Подп. и дата

Инв. № д

Взам. инв. №

Подп. и дата

в. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

25

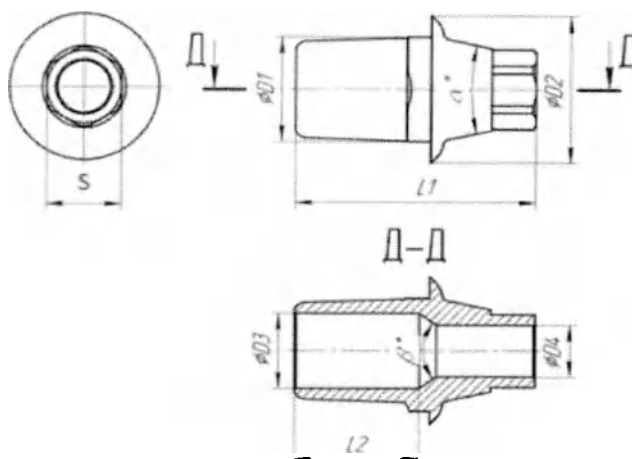


Рисунок 18. Основание с фиксацией.

Таблица 19 Основание с фиксацией.

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	S мм
0225	22°+30'	120°*	3,18±0,02	4,50±0,02	7,65±0,02	2,30+0,04	2,05+0,04	2,80±0,05	2,49-0,02
0097	22°+30'	180°*	3,18±0,02	4,50±0,02	7,20±0,02	2,40+0,04	1,65+0,04	4,00±0,05	2,09-0,02
0098	22°+30'	180°*	3,40±0,02	5,05±0,02	8,60±0,02	2,55+0,04	2,00+0,04	4,10±0,05	2,49-0,02
0203	24°+30'	70°*	3,20±0,02	4,50±0,02	7,10±0,02	2,30+0,04	1,60+0,04	3,70±0,05	2,24-0,02
0204	24°+30'	70°*	3,40±0,02	5,00±0,02	7,15±0,02	2,60+0,04	2,05+0,04	3,75±0,05	2,65-0,02

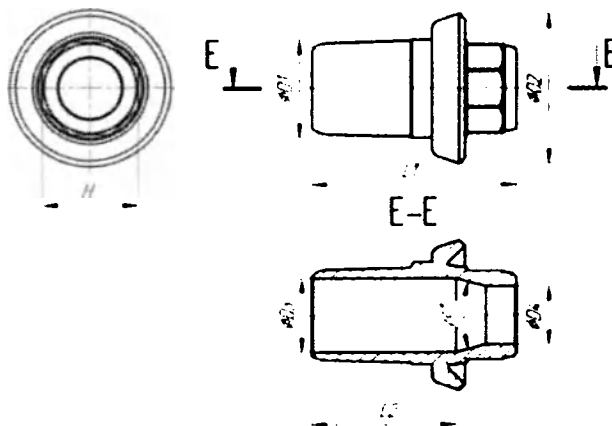


Рисунок 19. Основание с фиксацией.

Таблица 20 Основание с фиксацией.

№ в каталоге	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	H мм
0090	30°*	3,40±0,02	5,18±0,02	6,80±0,02	2,55+0,04	2,02+0,02	4,80±0,05	3,09+0,01 -0,005
0155	30°*	3,40±0,02	7,10±0,02	6,95±0,02	2,55+0,04	2,02+0,02	5,20±0,05	3,09+0,01 -0,005

Подп. и дата

Изм. № Л

Взам. инв. №

Подп. и дата

В.№ подл.

32.50.22 ИП

Лист

26

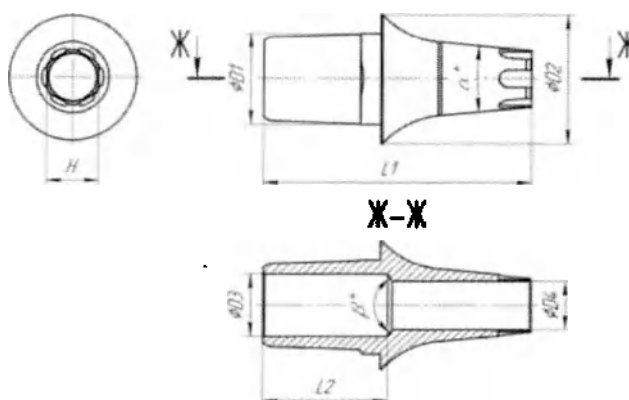


Рисунок 20. Основание с фиксацией.

Таблица 21 Основание с фиксацией.

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	H мм
0246	$11^\circ \pm 30'$	120°	$3,18 \pm 0,02$	$4,50 \pm 0,02$	$8,00 \pm 0,02$	$2,20 \pm 0,04$	$1,70 \pm 0,02$	$3,25 \pm 0,05$	$1,82 \pm 0,02$
0272	$11^\circ \pm 30'$	120°	$3,18 \pm 0,02$	$4,50 \pm 0,02$	$9,10 \pm 0,02$	$2,20 \pm 0,04$	$1,70 \pm 0,02$	$4,25 \pm 0,05$	$1,82 \pm 0,02$

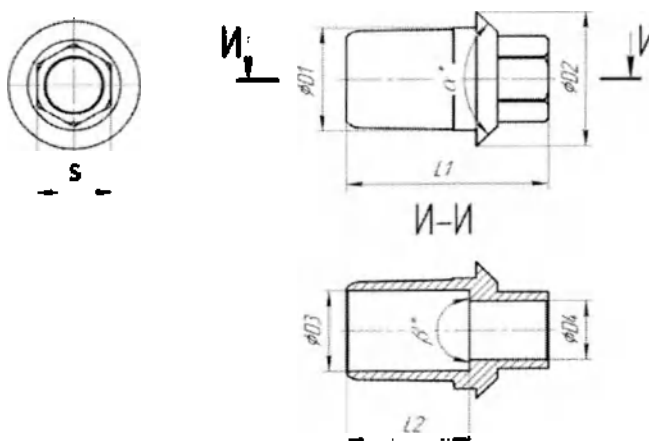


Рисунок 21. Основание с фиксацией.

Таблица 22 Основание с фиксацией.

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	S мм
0067	$90^\circ \pm 30'$	180°	$3,30 \pm 0,02$	$4,30 \pm 0,02$	$6,20 \pm 0,02$	$2,55 \pm 0,04$	$1,85 \pm 0,04$	$3,80 \pm 0,05$	$2,42 \pm 0,02$
0068	$90^\circ \pm 30'$	180°	$3,40 \pm 0,02$	$5,30 \pm 0,02$	$6,20 \pm 0,02$	$2,55 \pm 0,04$	$1,85 \pm 0,04$	$3,80 \pm 0,05$	$2,42 \pm 0,02$
0069	$90^\circ \pm 30'$	180°	$3,40 \pm 0,02$	$6,50 \pm 0,02$	$6,25 \pm 0,02$	$2,55 \pm 0,04$	$1,85 \pm 0,04$	$3,80 \pm 0,05$	$2,42 \pm 0,02$

Подп. и дата

Инв. № д

Взам. инв. №

Подп. и дата

в. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

27

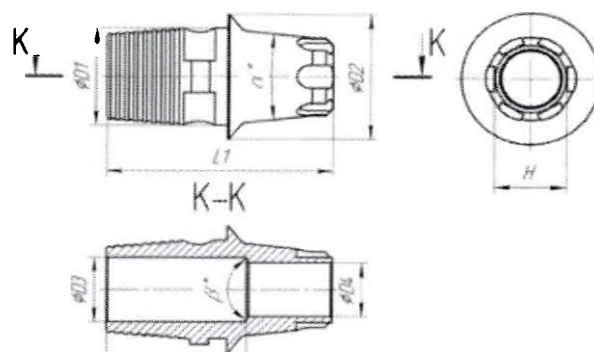


Рисунок 22. Основание с фиксацией.

Таблица 23 Основание с фиксацией.

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	H мм
0292	12° +30'	120°*	3,38 ±0,02	4,34 ±0,02	7,50 ±0,02	2,22 +0,04	1,85 +0,04	4,65 ±0,05	2,25- 0,02
0293	12° +30'	120°*	3,38 ±0,02	5,64 ±0,02	7,50 ±0,02	2,22 +0,04	1,85 +0,04	4,90 ±0,05	2,90 -0,02
0592	12° +30'	120°*	3,38 ±0,02	4,34 ±0,02	8,25 ±0,02	2,22 +0,04	1,85 +0,04	5,39 ±0,05	2,25- 0,02
0593	12° +30'	120°*	3,38 ±0,02	4,30 ±0,02	9,88 ±0,02	2,22 +0,04	1,85 -0,04	7,01 ±0,05	2,25- 0,02
0765	12° +30'	120°*	3,38 ±0,02	5,67 ±0,02	8,34 ±0,02	2,22 +0,04	1,85 -0,04	4,90 ±0,05	2,90 -0,02
0766	12° +30'	120°*	3,38 ±0,02	5,70 ±0,02	9,89 ±0,02	2,22 +0,04	1,85 -0,04	7,30 ±0,05	2,90 -0,02

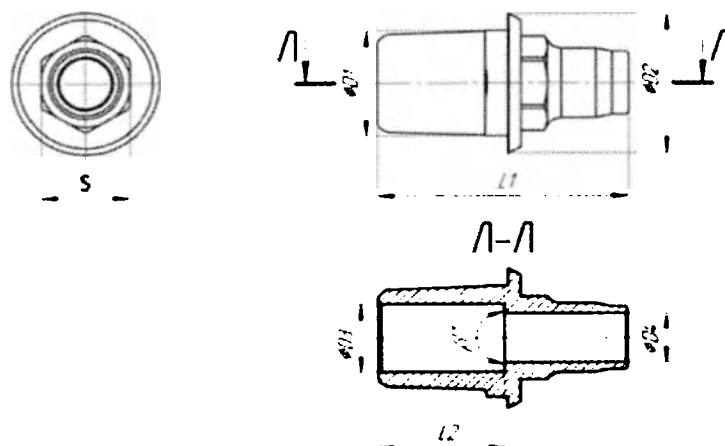


Рисунок 23. Основание с фиксацией.

Таблица 24 Основание с фиксацией.

№ в каталоге	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	S мм
0053	180°*	3,00±0,02	3,80±0,02	7,30±0,02	2,20+0,04	1,60+0,04	3,70±0,05	2,15-0,02
0054	180°*	3,40±0,02	4,50±0,02	7,70±0,02	2,20+0,04	1,60+0,04	3,90±0,05	2,70-0,02
0055	180°*	3,40±0,02	5,45±0,02	7,70±0,02	2,20+0,04	1,60+0,04	3,90±0,05	2,70-0,02

Подп. и дата

Изм. № д

Взам. инв. №

Подп. и дата

Ив. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

28

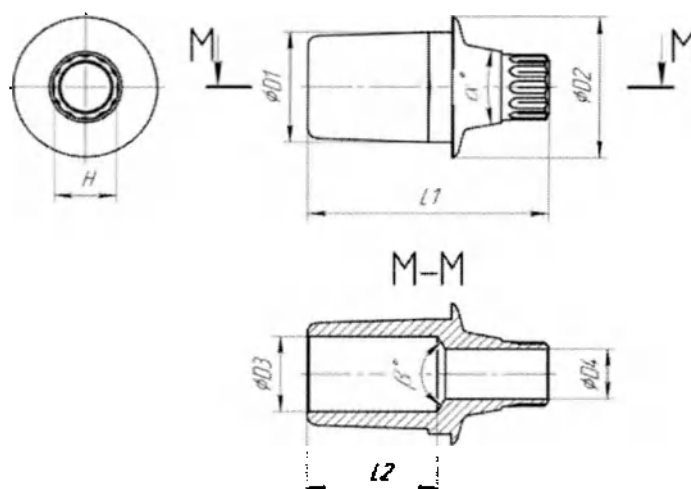


Рисунок 24. Основание с фиксацией.

Таблица 25 Основание с фиксацией.

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	H мм
0227	22° +30'	120°*	3,20 ±0,02	4,10 ±0,02	6,70 ±0,02	2,20 +0,04	1,45 -0,04	3,60 ±0,05	1,76- 0,02

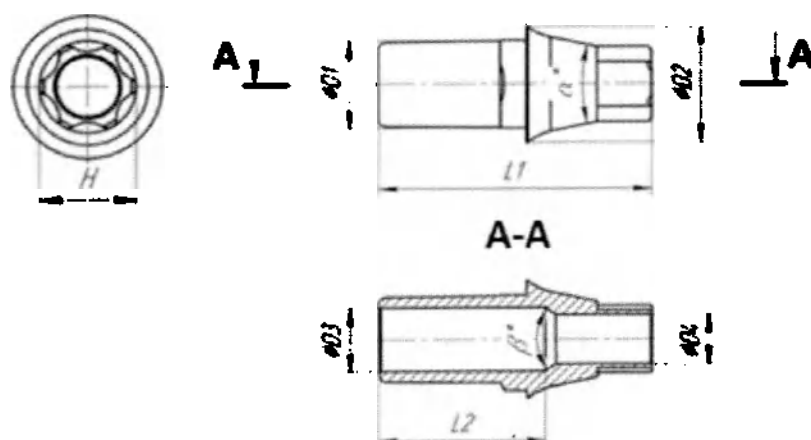


Рисунок 25. Основание с фиксацией.

Таблица 26 Основание с фиксацией.

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	H мм
0295	24°+30'	70°*	2,46±0,02	3,30±0,02	7,35±0,02	1,80+0,04	1,40+0,04	4,50±0,05	2,15-0,02

Подп. и дата

Изм. № д

Взам. инв. №

Подп. и дата

в. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

29

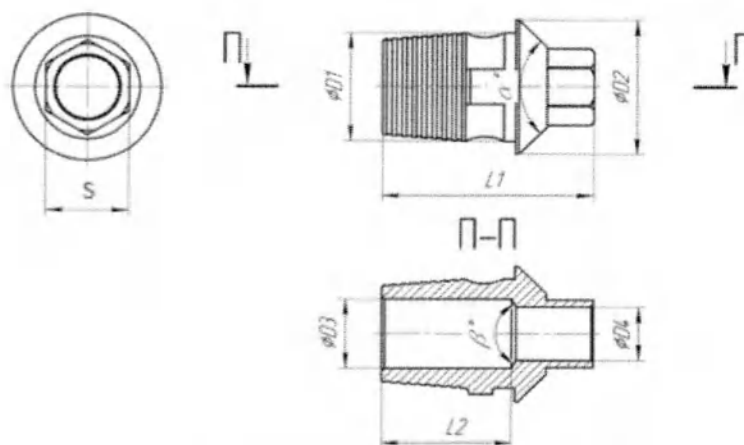


Рисунок 26. Основание с фиксацией.

Таблица 27 Основание с фиксацией.

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	S мм
0291	$90^\circ+30'$	$120^\circ*$	$3,38\pm 0,02$	$4,20\pm 0,02$	$6,35\pm 0,02$	$2,15+0,04$	$1,65+0,04$	$3,90\pm 0,05$	$2,10-0,02$

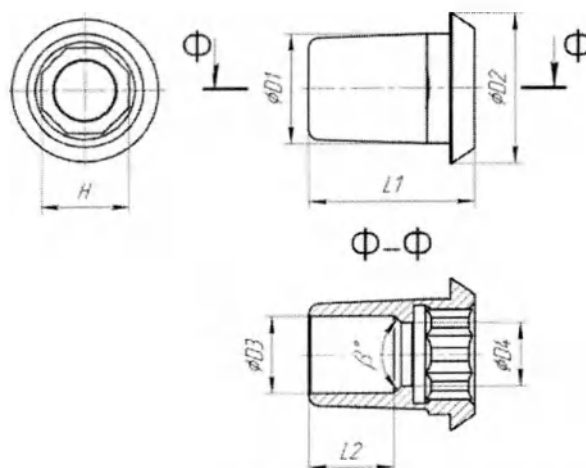


Рисунок 27. Основание с фиксацией.

Таблица 28 Основание с фиксацией.

№ в каталоге	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	H мм
0089	$60^\circ*$	$3,20\pm 0,02$	$4,40\pm 0,02$	$4,70\pm 0,02$	$2,25+0,04$	$1,85+0,02$	$2,42\pm 0,05$	$2,62-0,02$

Подп. и дата	Инв. № д	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

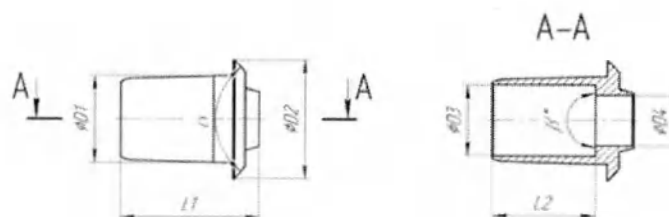


Рисунок 28. Основание без фиксации.

Таблица 29 Основание без фиксации.

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм
0070	90°+30'	120°*	3,40±0,02	4,28±0,02	5,22±0,02	2,55±0,04	1,85±0,04	3,80±0,05
0071	90°+30'	120°*	3,40±0,02	5,30±0,02	5,30±0,02	2,55±0,04	1,85±0,04	3,80±0,05
0072	90°+30'	120°*	3,40±0,02	6,50±0,02	5,30±0,02	2,55±0,04	1,85±0,04	3,80±0,05
0274		180°*	3,20±0,02	4,00±0,02	4,82±0,02	2,60±0,04	1,85±0,04	3,60±0,05
0022		180°*	3,20±0,02	5,00±0,02	5,02±0,02	2,60±0,04	2,02±0,04	3,60±0,05
0023		180°*	3,40±0,02	5,50±0,02	5,06±0,02	2,60±0,04	2,02±0,04	3,60±0,05
0275		180°*	3,20±0,02	4,55±0,02	4,92±0,02	2,60±0,04	2,02±0,04	3,60±0,05
0114		90°*	3,02±0,02	3,90±0,02	4,90±0,02	2,20±0,04	1,65±0,04	3,54±0,05
0115		90°*	3,02±0,02	4,30±0,02	4,90±0,02	2,20±0,04	1,65±0,04	3,44±0,05
0116		90°*	3,34±0,02	5,50±0,02	5,25±0,02	2,20±0,04	1,65±0,04	3,95±0,05
0276		90°*	3,40±0,02	6,50±0,02	5,25±0,02	2,20±0,04	1,65±0,04	3,79±0,05
0056		180°*	3,00±0,02	3,80±0,02	5,50±0,02	2,20±0,04	1,60±0,04	3,50±0,05
0057		180°*	3,40±0,02	4,50±0,02	5,20±0,02	2,25±0,04	1,60±0,04	3,80±0,05

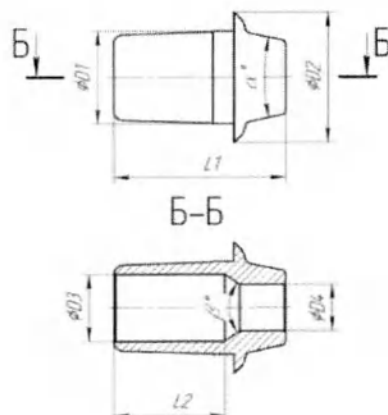


Рисунок 29. Основание без фиксации.

Таблица 30 Основание без фиксации.

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм
0228	22°+30'	120°*	3,20±0,02	4,10±0,02	6,05±0,02	2,20±0,04	1,45±0,04	3,60±0,05
0099	22°+30'	180°*	3,18±0,02	4,50±0,02	6,35±0,02	2,40±0,04	1,65±0,04	4,00±0,05
0100	22°+30'	180°*	3,40±0,02	5,05±0,02	6,30±0,02	2,55±0,04	2,00±0,04	4,10±0,05
0226	22°+30'	120°*	3,18±0,02	4,50±0,02	6,20±0,02	2,35±0,04	2,05±0,04	2,80±0,05
0205	24°+30'	70°*	3,20±0,02	4,50±0,02	5,75±0,02	2,30±0,04	1,60±0,04	3,70±0,05
0206	24°+30'	70°*	3,40±0,02	5,00±0,02	5,75±0,02	2,60±0,04	2,05±0,04	3,75±0,05
0296	24°+30'	70°*	2,50±0,02	3,30±0,02	5,85±0,02	1,80±0,04	1,40±0,04	4,45±0,05
0156	30°+30'	30°*	3,20±0,02	4,10±0,02	6,00±0,02	2,30±0,04	1,60±0,04	4,15±0,05
0157	30°+30'	30°*	3,40±0,02	5,00±0,02	6,25±0,02	2,30±0,04	1,60±0,04	4,10±0,05

Подп. и дата

Инв. № д

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

31

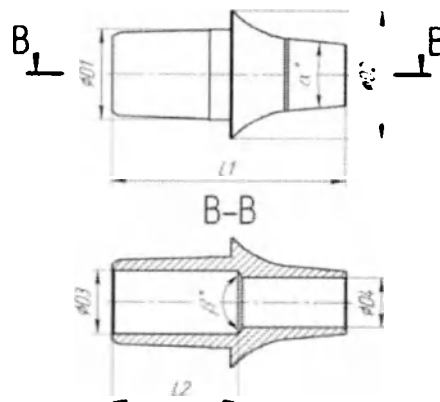


Рисунок 30 Основание без фиксации.

Таблица 31 Основание без фиксации.

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм
0247	$11^\circ+30'$	$120^\circ*$	$3,18\pm0,02$	$4,50\pm0,02$	$6,90\pm0,02$	$2,20+0,04$	$1,74+0,04$	$3,27\pm0,05$
0273	$11^\circ+30'$	$120^\circ*$	$3,18\pm0,02$	$4,50\pm0,02$	$7,90\pm0,02$	$2,20+0,04$	$1,74+0,04$	$4,25\pm0,05$

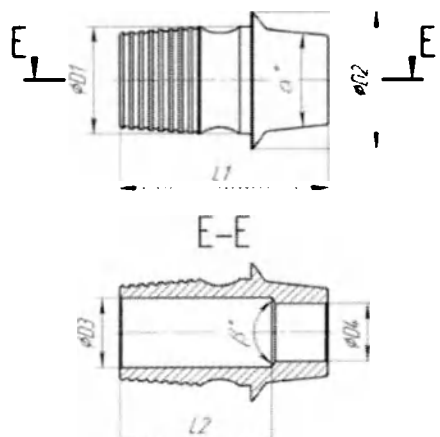


Рисунок 31. Основание без фиксации.

Таблица 32 Основание без фиксации.

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм
0202	$12^\circ+30'$	$120^\circ*$	$3,38\pm0,02$	$4,34\pm0,02$	$6,35\pm0,02$	$2,22+0,04$	$1,85+0,04$	$4,65\pm0,05$
0294	$12^\circ+30'$	$120^\circ*$	$3,38\pm0,02$	$5,64\pm0,02$	$6,35\pm0,02$	$2,22+0,04$	$1,85+0,04$	$4,90\pm0,05$
0588	$12^\circ+30'$	$120^\circ*$	$3,38\pm0,02$	$4,30\pm0,02$	$7,30\pm0,02$	$2,22+0,04$	$1,85+0,04$	$5,59\pm0,05$
0587	$12^\circ+30'$	$120^\circ*$	$3,38\pm0,02$	$4,30\pm0,02$	$8,85\pm0,02$	$2,22+0,04$	$1,85+0,04$	$7,10\pm0,05$
0767	$12^\circ+30'$	$120^\circ*$	$3,38\pm0,02$	$5,67\pm0,02$	$7,30\pm0,02$	$2,22+0,04$	$1,85+0,04$	$5,62\pm0,05$
0768	$12^\circ+30'$	$120^\circ*$	$3,38\pm0,02$	$5,70\pm0,02$	$8,85\pm0,02$	$2,22+0,04$	$1,85+0,04$	$7,10\pm0,05$
0284	$90^\circ+30'$	$120^\circ*$	$3,38\pm0,02$	$4,20\pm0,02$	$5,65\pm0,02$	$2,15+0,04$	$1,65+0,04$	$3,90\pm0,05$

Подп. и дата	Инв. № д'	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

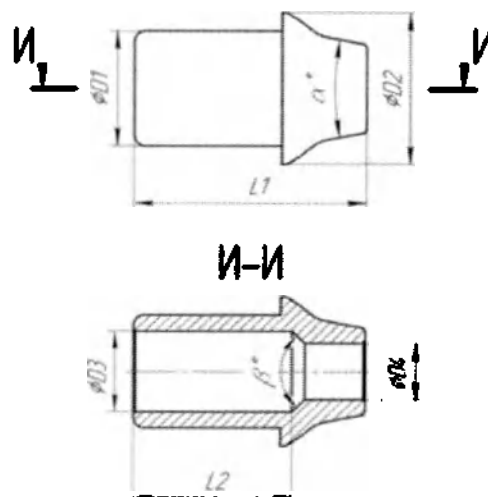


Рисунок 32. Основание без фиксации.

Таблица 33 Основание без фиксации.

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм
0478	22°+30'	90°*	3,20±0,02	4,20±0,02	6,28±0,02	2,30+0,04	1,62+0,04	4,30±0,05
0433	22°+30'	90°*	3,40±0,02	4,50±0,02	6,20±0,02	2,42+0,04	2,02+0,04	3,70±0,05

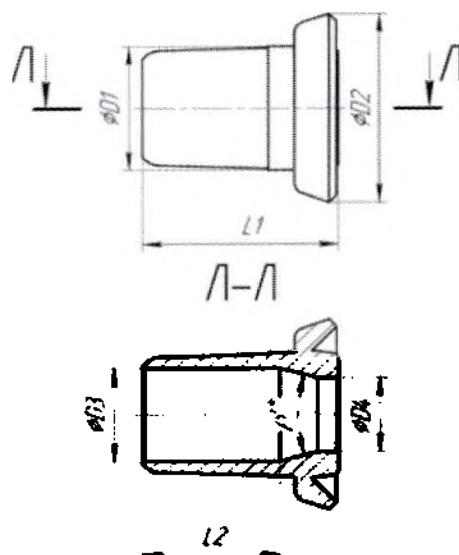


Рисунок 33. Основание без фиксации.

Таблица 34 Основание без фиксации.

№ в каталоге	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм
0159	30°*	3,40±0,02	5,18±0,02	5,15±0,02	2,55+0,04	2,02+0,04	3,60±0,05
0160	30°*	3,40±0,02	7,10±0,02	5,45±0,02	2,55+0,04	2,02+0,04	3,20±0,05

Подп. и дата	
Изм. № д	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Ив. № посл.	

32.50.22 ИП

Лист

33

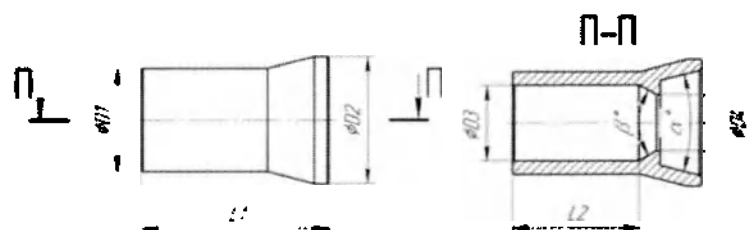


Рисунок 34 Основание без фиксации конус 43° для мультиюнита.

Таблица 35 Основание без фиксации конус 43° для мультиюнита.

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм
0477	43°-30'	180°*	3,00±0,02	4,80±0,02	6,00±0,02	2,20+0,04	1,50+0,04	3,10±0,05
0483	30°-30'	60°*	3,40±0,02	4,20±0,02	6,00±0,02	2,50+0,04	1,85+0,04	4,00±0,05

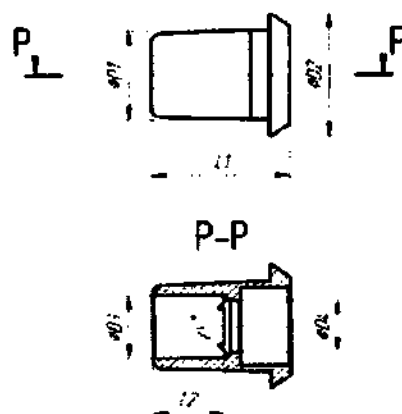


Рисунок 35 Основание без фиксации.

Таблица 36 Основание без фиксации.

№ в каталоге	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм
0158	90°*	3,20±0,02	4,40±0,02	4,70±0,02	2,25+0,04	1,85+0,04	2,42±0,05

Подп. и дата

Инв. № д

Взам. инв. №

Подп. и дата

в № подл.

32.50.22 ИП

Лист

34

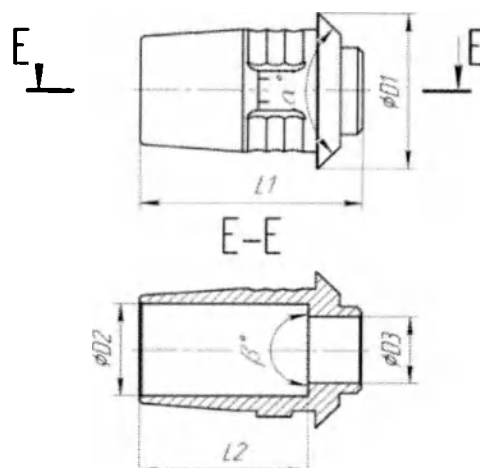


Рисунок 36. Основание без фиксации (Sirona).

Таблица 37 Основание без фиксации (Sirona).

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм
0200	$90^\circ+30'$	$120^\circ*$	$4,28\pm0,02$	$5,87\pm0,02$	$2,55+0,04$	$1,85+0,04$	$4,45\pm0,05$
0201	$90^\circ+30'$	$120^\circ*$	$5,30\pm0,02$	$5,95\pm0,02$	$2,55+0,04$	$1,85+0,04$	$4,45\pm0,05$
0171		$180^\circ*$	$4,40\pm0,02$	$5,57\pm0,02$	$2,60+0,04$	$1,85+0,04$	$4,25\pm0,05$
0267		$180^\circ*$	$5,00\pm0,02$	$5,67\pm0,02$	$2,60+0,04$	$2,02+0,04$	$4,25\pm0,05$
0268		$180^\circ*$	$5,50\pm0,02$	$5,71\pm0,02$	$2,60+0,04$	$2,02+0,04$	$4,20\pm0,05$
0183		$90^\circ*$	$3,90\pm0,02$	$5,55\pm0,02$	$2,20+0,04$	$1,65+0,04$	$4,09\pm0,05$
0184		$90^\circ*$	$4,30\pm0,02$	$5,55\pm0,02$	$2,20+0,04$	$1,65+0,04$	$4,09\pm0,05$
0193		$90^\circ*$	$5,50\pm0,02$	$5,90\pm0,02$	$2,20+0,04$	$1,65+0,04$	$4,44\pm0,05$
0181		$180^\circ*$	$3,85\pm0,02$	$6,15\pm0,02$	$2,20+0,04$	$1,60+0,04$	$4,15\pm0,05$
0182		$180^\circ*$	$4,60\pm0,02$	$5,85\pm0,02$	$2,25+0,04$	$1,60+0,04$	$4,45\pm0,05$

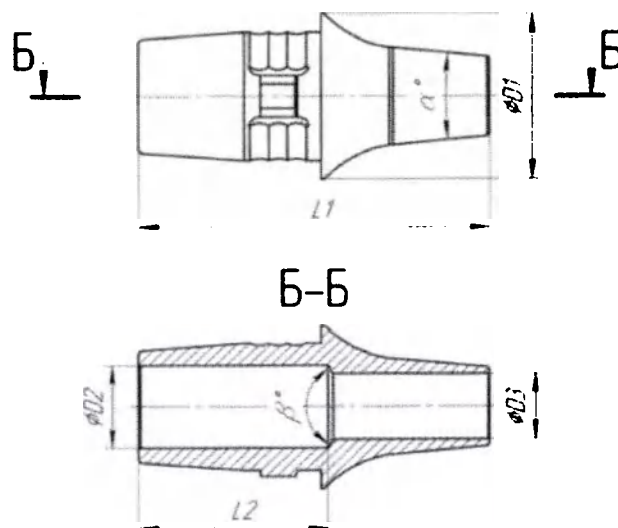


Рисунок 37. Основание без фиксации (Sirona).

Таблица 38 Основание без фиксации (Sirona).

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм
0278	$11^\circ+30'$	$120^\circ*$	$4,35\pm0,02$	$7,95\pm0,02$	$2,20+0,04$	$1,74+0,02$	$3,90\pm0,05$
0415	$11^\circ+30'$	$120^\circ*$	$4,35\pm0,02$	$8,95\pm0,02$	$2,20+0,04$	$1,74+0,02$	$4,82\pm0,05$

Подп. и дата

Инв. № дс

Взам. инв. №

Подп. и дата

в. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

35

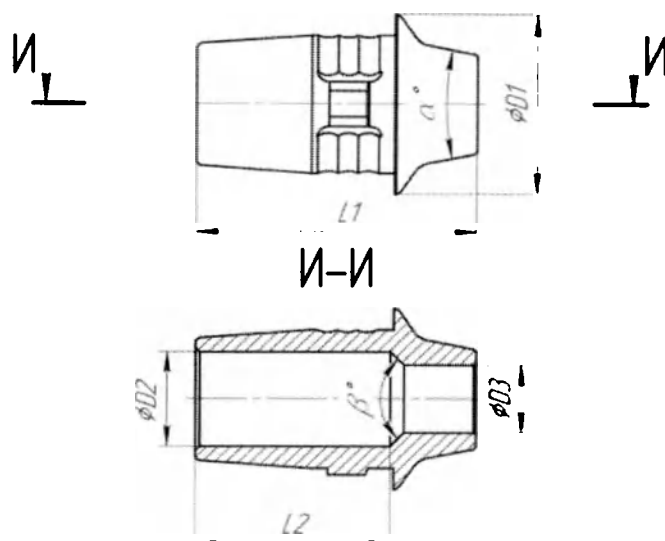


Рисунок 38. Основание без фиксации (Sirona).

Таблица 39 Основание без фиксации (Sirona).

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм
0176	22°+30'	120°*	4,50±0,02	6,85±0,02	2,35+0,04	2,05+0,04	3,45±0,05
0174	22°+30'	180°*	4,50±0,02	7,00±0,02	2,40+0,04	1,65+0,04	4,65±0,05
0175	22°+30'	180°*	5,05±0,02	7,00±0,02	2,55+0,04	2,00+0,04	4,75±0,05
0174	22°+30'	180°*	4,50±0,02	7,00±0,02	2,40+0,04	1,65+0,04	4,65±0,05
0175	22°+30'	180°*	5,05±0,02	7,00±0,02	2,55+0,04	2,00+0,04	4,75±0,05
0489	22°+30'	90°*	4,50±0,02	6,6±0,02	2,30+0,04	1,65+0,04	4,57±0,05
0491	22°+30'	90°*	4,50±0,02	6,95±0,02	2,40+0,04	2,00+0,04	4,45±0,05
0195	30°+30'	30°*	4,50±0,02	5,77±0,02	2,30+0,04	1,63+0,04	4,48±0,05
0197	30°+30'	30°*	4,50±0,02	5,78±0,02	2,30+0,04	1,60+0,04	4,42±0,05

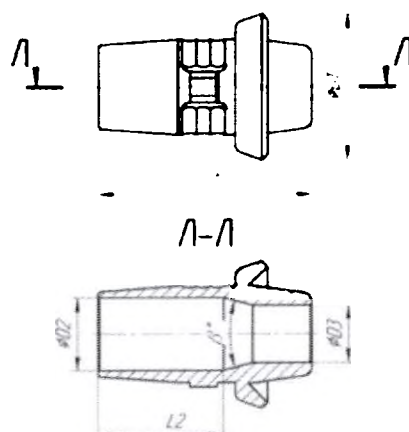


Рисунок 39. Основание без фиксации (Sirona).

Таблица 40 Основание без фиксации (Sirona).

№ в каталоге	β°	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм
0199	30°*	5,18±0,02	7,25±0,02	2,55+0,04	2,02+0,04	4,25±0,05

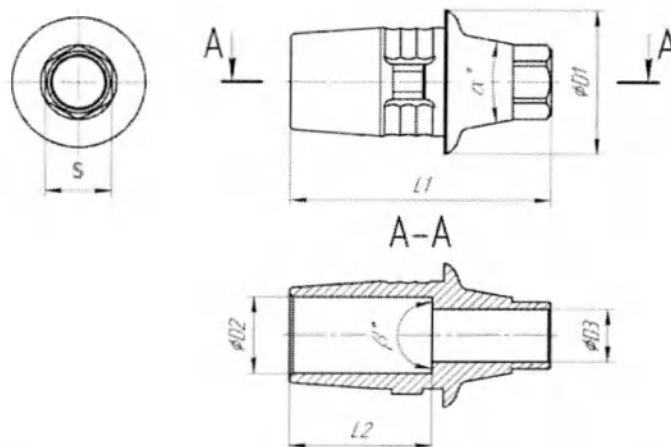


Рисунок 40. Основание с фиксацией (Sirona).

Таблица 41 Основание с фиксацией (Sirona).

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм	S мм
0162	22°+30'	180°*	4,50±0,02	7,85±0,02	2,40+0,04	1,65+0,04	4,65±0,05	2,09-0,01
0163	22°+30'	180°*	5,05±0,02	9,25±0,02	2,55+0,04	2,00+0,04	4,75±0,05	2,49-0,01
0270	22°+30'	120°*	4,50±0,01	8,30±0,02	2,35+0,04	2,05+0,04	3,45±0,05	2,49-0,01
0164	24°+30'	70°*	4,50±0,02	8,26±0,02	2,30+0,04	1,60+0,04	4,86±0,05	2,24-0,02
0165	24°+30'	70°*	4,98±0,01	8,45±0,02	2,60+0,04	2,05+0,04	5,05±0,05	2,65-0,02
0488	22°+30'	90°*	4,50±0,02	8,25±0,02	2,30+0,04	1,65+0,04	4,57±0,05	2,09-0,01
0490	22°+30'	90°*	4,50±0,02	8,25±0,02	2,40+0,04	2,00+0,04	4,45±0,05	2,49-0,01

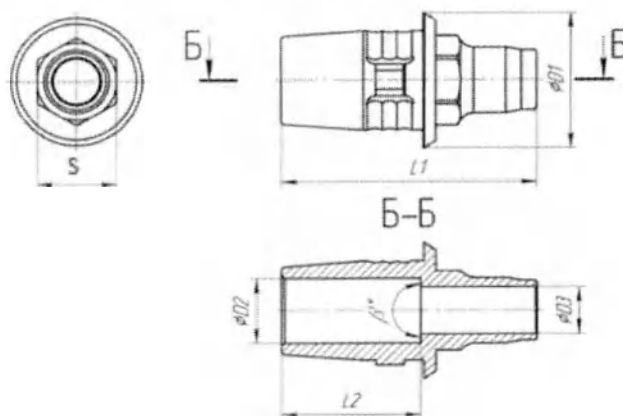


Рисунок 41. Основание с фиксацией (Sirona).

Таблица 42 Основание с фиксацией (Sirona).

№ в каталоге	β°	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм	S мм
0169	180°*	3,85±0,02	6,55±0,02	2,20+0,04	1,60+0,04	4,35±0,05	2,17-0,01
0170	180°*	4,60±0,02	8,35±0,02	2,20+0,04	1,60+0,04	4,55±0,05	2,70-0,01

Подп. и дата

Инв. № д

Взам. инв. №

Подп. и дата

в. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

37

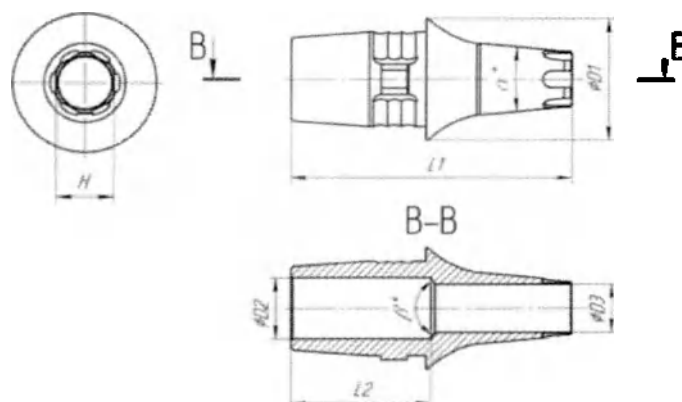


Рисунок 42. Основание с фиксацией (Sirona).

Таблица 43 Основание с фиксацией (Sirona).

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм	H мм
0277	11°+30'	120°*	4,35±0,01	8,65±0,02	2,20+0,04	1,74+0,02	3,90±0,05	1,82-0,01
0414	11°+30'	120°*	4,35±0,01	9,65±0,02	2,20+0,04	1,74+0,02	4,82±0,05	1,82-0,01

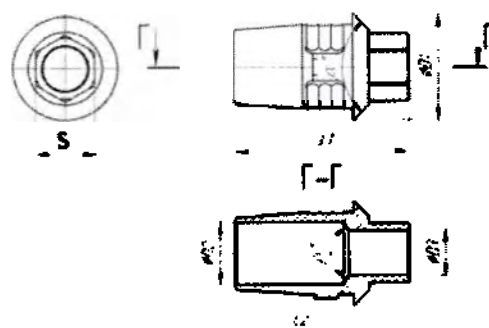


Рисунок 43. Основание с фиксацией (Sirona).

Таблица 44 Основание с фиксацией (Sirona).

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм	S мм
0269	90°+30'	120°*	4,30±0,02	6,85±0,02	2,55+0,04	1,85+0,04	4,25±0,05	2,42-0,01
0161	90°+30'	120°*	5,30±0,02	6,90±0,02	2,55+0,04	1,85+0,04	4,25±0,05	2,42-0,01

Подп. и дата

Изм. № Л

Взам. инв. №

Подп. и дата

В.№ подл.

32.50.22 ИП

Лист

38

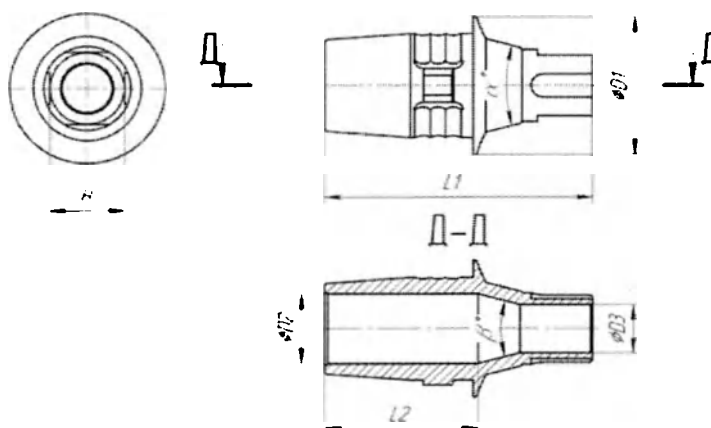


Рисунок 44. Основание с фиксацией (Sirona).

Таблица 45 Основание с фиксацией (Sirona).

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм	H мм
0194	$30^\circ+30'$	$30^\circ*$	$4,50\pm0,02$	$8,35\pm0,02$	$2,30-0,04$	$1,60-0,04$	$4,80\pm0,05$	$1,97-0,01$
0196	$30^\circ+30'$	$30^\circ*$	$4,50\pm0,02$	$10,05\pm0,02$	$2,30-0,04$	$1,60+0,04$	$4,75\pm0,05$	$2,04-0,01$

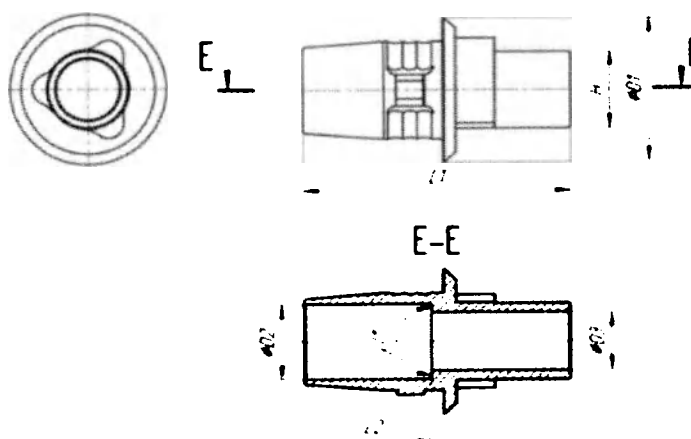


Рисунок 45. Основание с фиксацией (Sirona).

Таблица 46 Основание с фиксацией (Sirona).

№ в каталоге	β°	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм	H мм
0264	180°	$4,40\pm0,02$	$7,87\pm0,02$	$2,60+0,04$	$1,85+0,04$	$4,25\pm0,05$	$2,25-0,02$
0265	180°	$5,00\pm0,02$	$8,87\pm0,02$	$2,60+0,04$	$2,02+0,04$	$4,25\pm0,05$	$2,65-0,02$
0266	180°	$5,50\pm0,02$	$8,85\pm0,02$	$2,60+0,04$	$2,02+0,04$	$4,23\pm0,05$	$2,88-0,02$

Подп. и дата

Имя. № д

Взам. имя. №

Подп. и дата

в. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

39

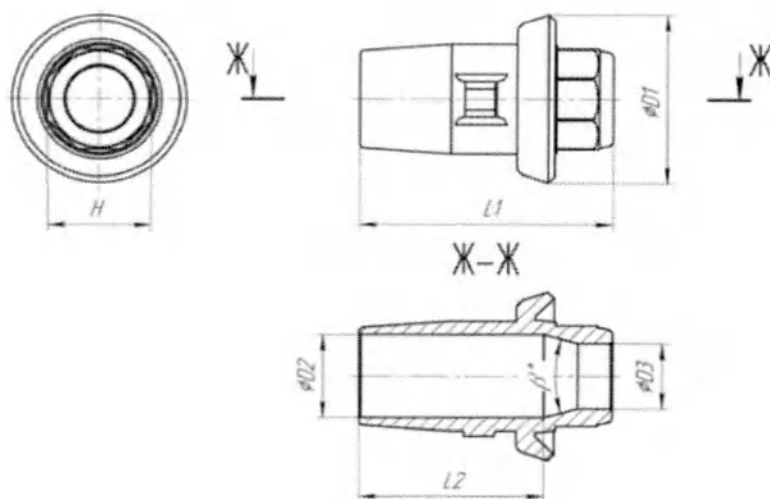


Рисунок 46. Основание с фиксацией (Sirona).

Таблица 47 Основание с фиксацией (Sirona).

№ в каталоге	β°	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм	H мм
0198	30°*	5,18±0,02	7,45±0,02	2,55±0,04	2,02±0,04	5,45±0,05	3,09+0,01-0,005

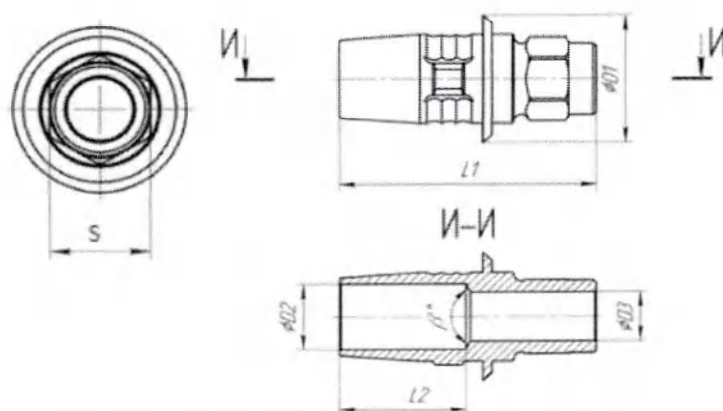


Рисунок 47. Основание с фиксацией (Sirona).

Таблица 48 Основание с фиксацией (Sirona).

№ в каталоге	β°	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм	S мм
0166	120°*	3,90±0,02	8,45±0,02	2,20±0,04	1,65±0,04	4,19±0,05	2,20-0,02
0167	120°*	4,30±0,02	8,35±0,02	2,20±0,04	1,65±0,04	4,09±0,05	2,49-0,02
0168	120°*	5,50±0,02	8,70±0,02	2,20±0,04	1,65±0,04	4,44±0,05	2,49-0,02

Подп. и дата

Инв. № д

Взам. инв. №

Подп. и дата

в.№ подл.

32.50.22 ИП

Лист

40

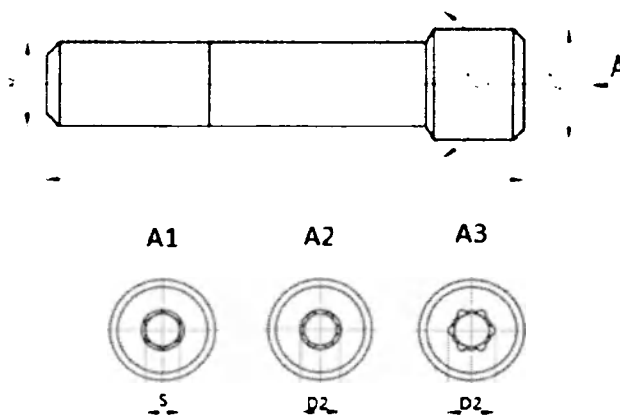


Рисунок 48. Винт.

Таблица 49 Винт.

№ в каталоге	α°	D1 мм	L мм	M мм	S мм	D2 мм	Вид
0138	180°*	2,35-0,02	8,25±0,02	1,6	1,27*		A1
0257	180°*	2,10-0,02	7,50±0,02	1,4	1,27*		A1
0249	120°*	2,28-0,02	10,20±0,02	2	1,27*		A1
0248	120°*	2,10-0,02	8,80±0,02	1,8	1,00*		A1
0137	180°	2,00-0,02	8,42±0,02	1,6	1,20*		A1
0140	90°*	2,05-0,02	9,50±0,02	1,6	1,20*		A1
0374-02	180°*	1,98-0,02	3,43±0,02	1,4		спец ключ ø1,5	A2
0374-03	180°*	2,10-0,02	3,87±0,02	1,4	1,20*		A1
0374-01	180°*	2,10-0,02	3,87±0,02	1,4	1,27*		A1
0085	60°*	2,40-0,02	4,65±0,02	1,6	1,00*		A1
0431	90°*	2,21-0,02	10,20±0,02	1,6	1,20*		A1
0432	90°*	2,32-0,02	8,36±0,02	2	1,20*		A1
0254	90°*	2,17-0,02	4,60±0,02	1,8		спец ключ ø 1,8	A3
0255	30°*	2,50-0,02	8,50±0,02	2		спец ключ ø 1,8	A3
0930	120°*	2,06-0,02	7,30±0,02	2	1,27*		A1

Подп. и дата

Инт. № д

Взам. инв. №

Подп. и дата

в. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

41

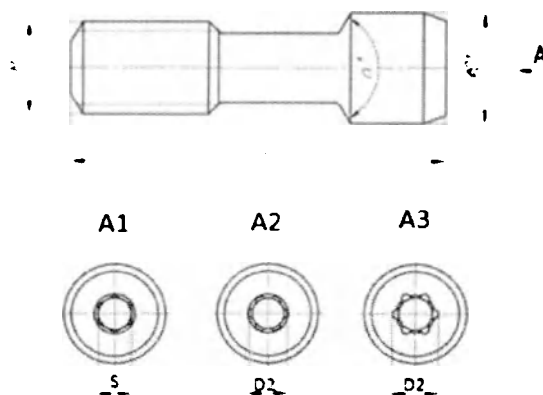


Рисунок 49. Винт.

Таблица 50 Винт.

№ в каталоге	α°	D1 мм	L мм	M мм	S мм	D2 мм	Вид
0297	120°*	2,08-0,02	7,60±0,02	1,6	1,27*		A1
0134	120°*	2,25-0,02	8,20±0,02	1,8	1,27*		A1
0504	180°*	2,15-0,02	7,00±0,02	1,8	1,27*		A1
0139	180°*	2,40-0,02	11,30±0,02	2	1,27*		A1
0256	30°*	2,10-0,02	7,86±0,02	1,6		спец ключ ø1,8	A3
0119	180°*	2,50-0,02	8,25±0,02	1,8		спец ключ ø1,5	A2
0122	70°*	2,22-0,02	8,85±0,02	1,8		спец ключ ø1,5	A2
0120	180°*	2,50-0,02	9,90±0,02	2		спец ключ ø1,5	A2
0123	70°*	2,55-0,02	10,60±0,02	2		спец ключ ø1,5	A2
0307	70°*	1,81-0,02	6,70±0,02	1,4		спец ключ ø1,5	A2
0215	70°*	2,24-0,02	7,33±0,02	1,6		спец ключ ø1,5	A2
0813	70°*	2,24-0,02	9,65±0,02	1,6		спец ключ ø1,5	A2
0814	70°*	2,55-0,02	9,80±0,02	2		спец ключ ø1,5	A2
0216	70°*	2,55-0,02	7,30±0,02	2		спец ключ ø1,5	A2
0561	70°*	2,42-0,02	7,00±0,02	1,6		спец ключ ø1,5	A2
0560	70°*	2,42-0,02	7,00±0,02	2		спец ключ ø1,5	A2
0462	180°*	2,15-0,02	8,05±0,02	1,8	1,27*		A1
0811	90°*	2,42-0,02	9,93±0,02	1,6	1,27*		A1
0812	90°*	2,42-0,02	8,90±0,02	2	1,27*		A1
0929	70°*	2,42-0,02	9,00±0,02	2			A2
0931	90°*	2,00-0,02	9,50±0,02	1,6	1,20*		A1
0942	90°*	2,00-0,02	7,50±0,02	2	1,20*		A1

Подп. и дата

Инв. № ду

Взам. инв. №

Подп. и дата

В. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

42

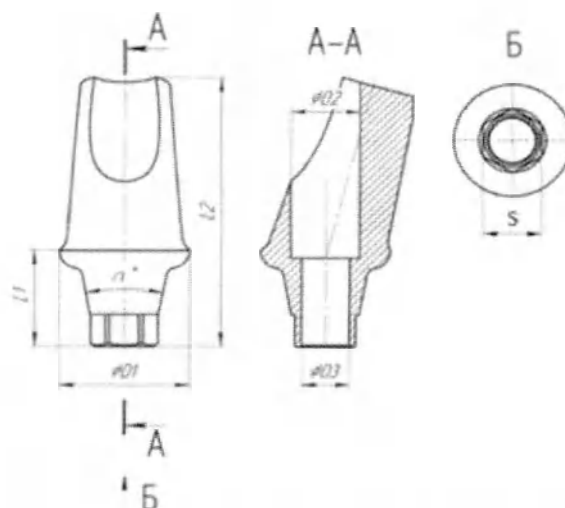


Рисунок 50. Абатмент угловой 15°.

Таблица 51 Абатмент угловой 15°.

№ в каталоге	α°	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм	S мм
0093	22°+30'	4,50±0,02	3,46±0,02	2,40+0,04	1,65+0,04	9,68*	2,09-0,02
0263	22°+30'	4,50±0,02	5,60±0,02	2,40+0,04	1,65+0,04	11,58*	2,09-0,02
0094	22°+30'	5,50±0,02	6,20±0,02	2,55+0,04	2,00+0,04	12,90*	2,49-0,02
0221	22°+30'	4,60±0,02	4,50±0,02	2,35+0,04	2,05+0,04	12,07*	2,49-0,02
0222	22°+30'	4,60±0,02	6,00±0,02	2,35+0,04	2,05+0,04	13,51*	2,49-0,03
0212	24°+30'	4,50±0,02	5,65±0,02	2,30+0,04	1,60+0,04	11,62*	2,24-0,02
0214	24°+30'	5,50±0,02	5,50±0,02	2,60+0,04	2,05+0,04	11,60*	2,65-0,02
0211	24°+30'	4,45±0,02	5,20±0,02	2,30+0,04	1,60+0,04	11,60*	2,24-0,02
0213	24°+30'	5,50±0,02	3,75±0,02	2,60+0,04	2,05+0,04	10,10*	2,65-0,02

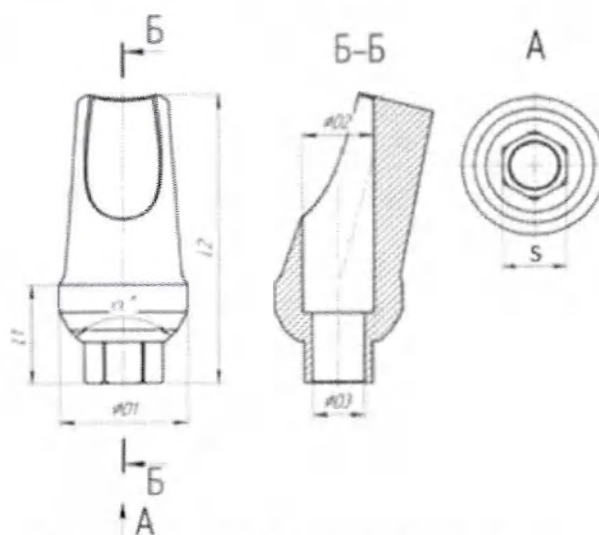


Рисунок 51. Абатмент угловой 15°.

Таблица 52 Абатмент угловой 15°.

№ в каталоге	α°	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм	S мм
0063	90°+30'	4,50±0,02	3,65±0,02	2,55+0,04	1,85+0,04	10,60*	2,42-0,02
0153	90°+30'	4,50±0,02	5,00±0,02	2,55+0,04	1,85+0,04	11,90*	2,42-0,02
0064	90°+30'	4,50±0,02	4,12±0,02	2,55+0,04	1,85+0,04	11,04*	2,42-0,02
0154	90°+30'	4,50±0,02	5,15±0,02	2,55+0,04	1,85+0,04	12,07*	2,42-0,02

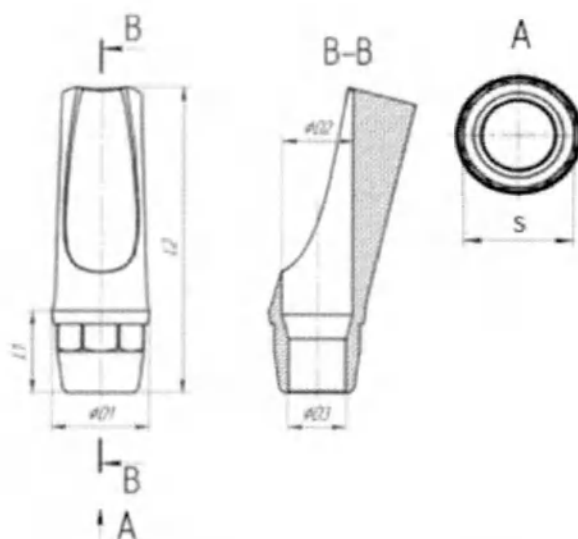


Рисунок 52. Абатмент угловой 15°.

Таблица 53 Абатмент угловой 15°.

№ в каталоге	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм	S мм
0086	3,50±0,02	3,03±0,02	2,55±0,04	2,05±0,04	10,87*	3,09-0,02

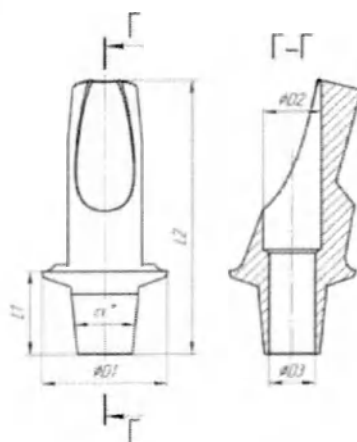


Рисунок 53. Абатмент угловой 15°.

Таблица 54 Абатмент угловой 15°.

№ в каталоге	α°	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм
0237	11°+30'	4,80±0,02	3,30±0,02	2,20±0,04	1,74±0,04	10,75*
0238	11°+30'	5,35±0,02	3,90±0,02	2,20±0,04	1,74±0,04	11,40*
0239	11°+30'	5,42±0,02	5,36±0,02	2,20±0,04	1,74±0,04	12,86*

Подп. и дата

Инв. № ду

Взам. инв. №

Подп. и дата

в. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

44

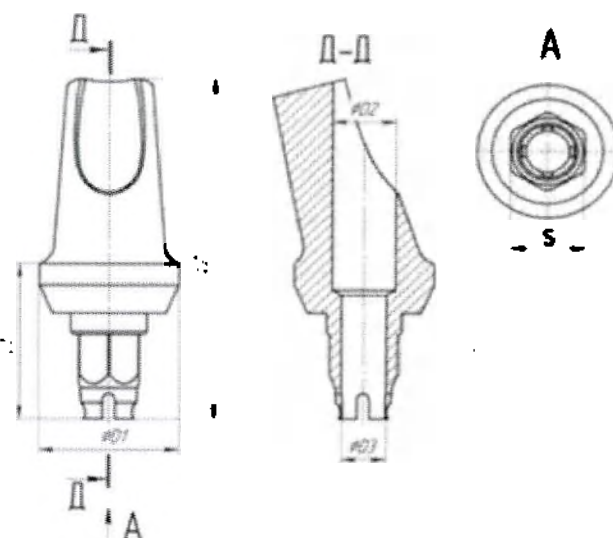


Рисунок 54. Абатмент угловой 15°.

Таблица 55 угловой 15°.

№ в каталоге	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм	S мм
0049	4,39±0,02	5,86±0,02	2,30+0,04	1,60+0,04	13,10*	2,17-0,02
0050	4,99±0,02	5,80±0,02	2,30+0,04	1,60+0,04	13,36*	2,17-0,02
0281	4,99±0,02	8,02±0,02	2,30+0,04	1,60+0,04	15,36*	2,17-0,02

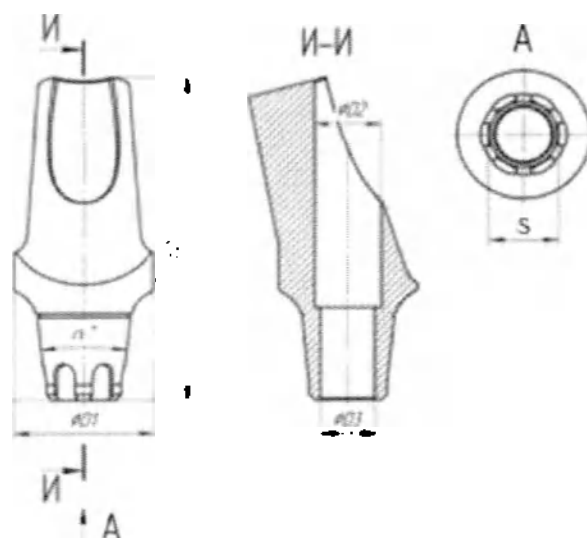


Рисунок 55. Абатмент угловой 15°.

Таблица 56 Абатмент угловой 15°.

№ в каталоге	α°	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм	S мм
0311	12°+30'	4,80±0,02	7,00±0,02	2,30+0,04	1,85+0,04	13,36*	2,25-0,02
0310	12°+30'	4,80±0,02	5,27±0,02	2,30+0,04	1,85+0,04	11,35*	2,25-0,02
0313	12°+30'	5,48±0,02	4,96±0,02	2,30+0,04	1,85+0,04	11,87*	2,90-0,02
0312	12°+30'	5,48±0,02	6,98±0,02	2,30+0,04	1,85+0,04	13,87*	2,90-0,02

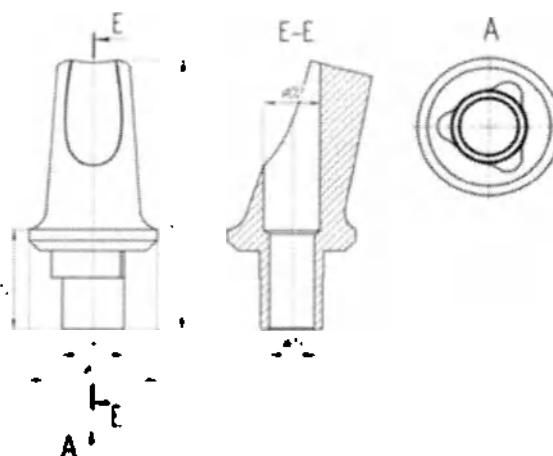


Рисунок 56. Абатмент угловой 15°.

Таблица 57 Абатмент угловой 15°.

№ в каталоге	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм	H мм
0008	4,50±0,02	3,85±0,02	2,60+0,04	1,85+0,04	11,72*	2,20-0,02
0009	4,50±0,02	5,70±0,02	2,60+0,04	1,85+0,04	11,79*	2,25-0,02
0010	5,25±0,02	5,00±0,02	2,60+0,04	2,02+0,04	12,89*	2,65-0,02
0011	5,20±0,02	7,02±0,02	2,60+0,04	2,02+0,04	14,85*	2,65-0,02
0012	6,00±0,02	4,81±0,02	2,60+0,04	2,02+0,04	12,97*	2,88-0,02
0133	6,00±0,02	6,79±0,02	2,60+0,04	2,02+0,04	14,68*	2,88-0,02

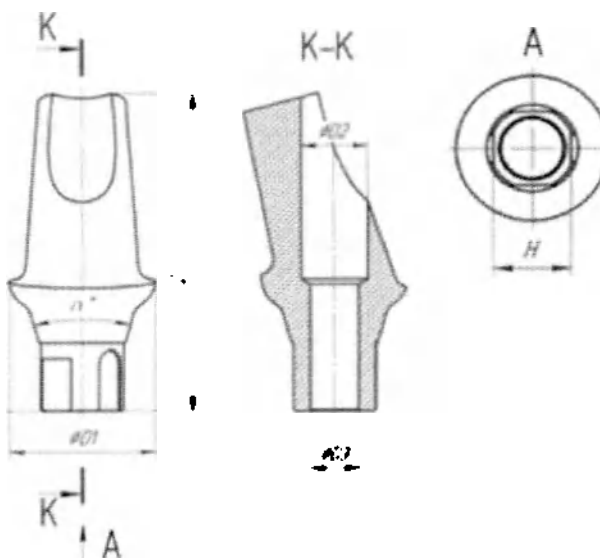


Рисунок 57. Абатмент угловой 15°.

Таблица 58 Абатмент угловой 15°.

№ в каталоге	α°	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм	H мм
0078	30°+30'	4,89±0,02	4,74±0,02	2,30+0,04	1,60+0,04	11,06*	2,42-0,02
0282	30°+30'	4,97±0,02	6,11±0,02	2,30+0,04	1,60+0,04	12,31*	2,42-0,02
0077	30°+30'	4,07±0,02	4,90±0,02	2,30+0,04	1,60+0,04	10,11*	1,97-0,02

Подп. и дата

Изм. № ду

Взам. инв. №

Подп. и дата

в. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

46

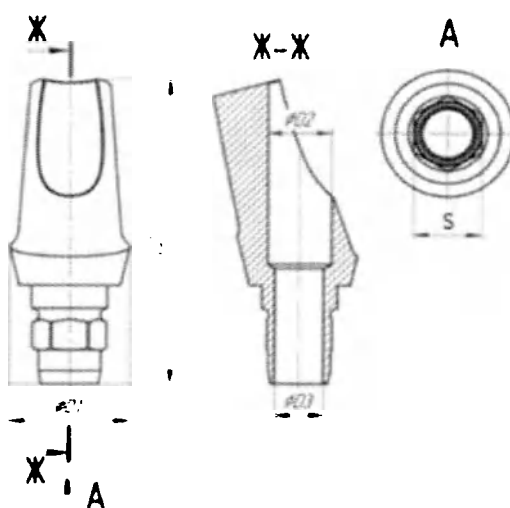


Рисунок 58. Абатмент угловой 15°.

Таблица 59 Абатмент угловой 15°.

№ в каталоге	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм	S мм
0104	4,05±0,02	5,20*	2,20+0,04	1,65+0,04	10,77*	2,20-0,02
0304	5,00±0,02	6,23*	2,20+0,04	1,65+0,04	11,96*	2,49-0,02
0105	4,35±0,02	4,50*	2,20+0,04	1,65+0,04	10,80*	2,49-0,02
0303	4,60±0,02	5,04*	2,20+0,04	1,65+0,04	11,80*	2,20-0,02
0106	5,00±0,02	5,12*	2,20+0,04	1,65+0,04	10,80*	2,49-0,02
0302	5,50±0,02	5,17*	2,20+0,04	1,65+0,04	11,50*	2,49-0,02
0305	5,56±0,02	5,40*	2,20+0,04	1,65+0,04	12,05*	2,49-0,02

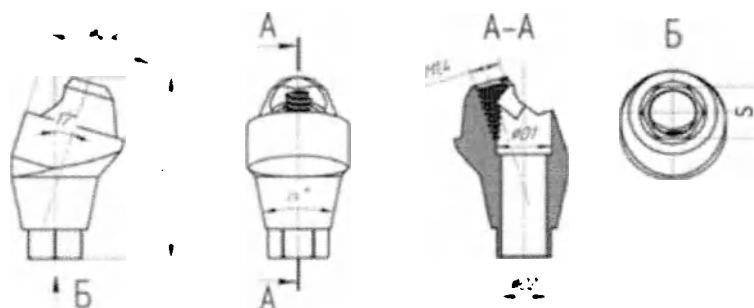


Рисунок 59. Мультиюнит угловой 17°

Таблица 60 Мультиюнит угловой 17°

№ в каталоге	α°	D1 мм	D2 мм	L мм	S мм
0362	22°+30'	2,50+0,04	1,65+0,04	6,45*	2,09-0,02
0363	22°+30'	2,50+0,04	1,65+0,04	7,45*	2,09-0,02
0366	22°+30'	2,55+0,04	2,10+0,04	7,95*	2,49-0,02
0367	22°+30'	2,55+0,04	2,10+0,04	8,95*	2,49-0,02

Подп. и дата

Инв. № д/у

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

47

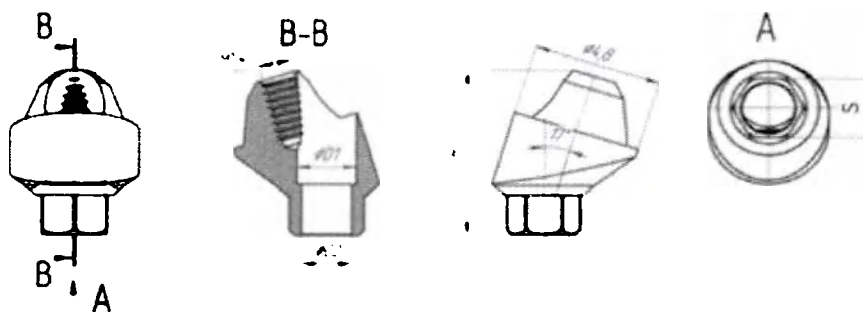


Рисунок 60. Мультиюнит угловой 17°.

Таблица 61 Мультиюнит угловой 17°

№ в каталоге	α°	$D1$ мм	$D2$ мм	L мм	S мм
0348	$90^\circ+30'$	$2,20+0,04$	$1,85+0,04$	$6,38^*$	$2,42-0,02$
0349	$90^\circ+30'$	$2,20+0,04$	$1,85+0,04$	$7,12^*$	$2,42-0,02$
0352	$90^\circ+30'$	$2,20+0,04$	$1,85+0,04$	$6,07^*$	$2,42-0,02$
0353	$90^\circ+30'$	$2,20+0,04$	$1,85+0,04$	$7,06^*$	$2,42-0,02$

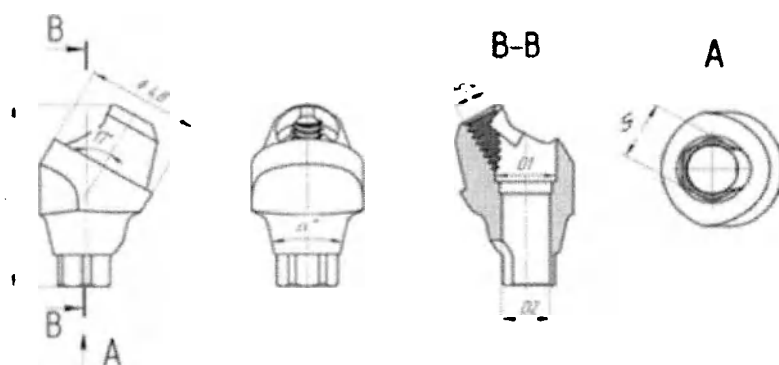


Рисунок 61. Мультиюнит угловой 17°.

Таблица 62 Мультиюнит угловой 17°

№ в каталоге	α°	$D1$ мм	$D2$ мм	L мм	S мм
0334	$24^\circ+30'$	$2,50+0,04$	$1,85+0,04$	$6,88^*$	$2,24-0,02$
0335	$24^\circ+30'$	$2,50+0,04$	$1,85+0,04$	$7,67^*$	$2,24-0,02$
0338	$24^\circ+30'$	$2,50+0,04$	$2,25+0,04$	$7,17^*$	$2,65-0,02$
0339	$24^\circ+30'$	$2,50+0,04$	$2,25+0,04$	$8,04^*$	$2,65-0,02$

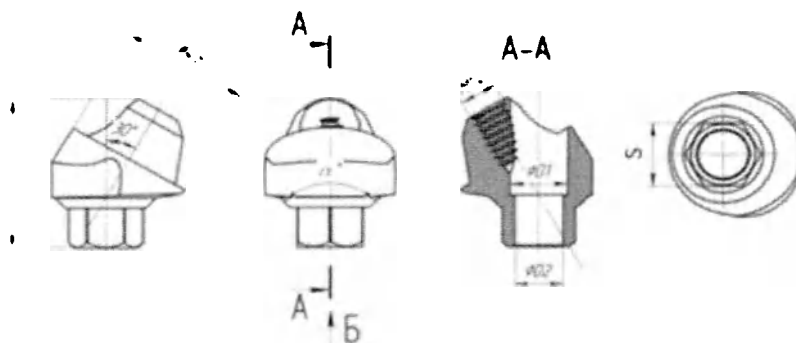


Рисунок 62. Мультиюнит угловой 30°.

Таблица 63 Мультиюнит угловой 30°.

№ в каталоге	α°	$D1$ мм	$D2$ мм	L мм	S мм
0350	$90^\circ+30'$	$2,20+0,04$	$1,85+0,04$	$5,77^*$	$2,42-0,02$
0351	$90^\circ+30'$	$2,20+0,04$	$1,85+0,04$	$6,60^*$	$2,42-0,02$
0354	$90^\circ+30'$	$2,20+0,04$	$1,85+0,04$	$6,51^*$	$2,42-0,02$
0355	$90^\circ+30'$	$2,20+0,04$	$1,85+0,04$	$7,55^*$	$2,42-0,02$

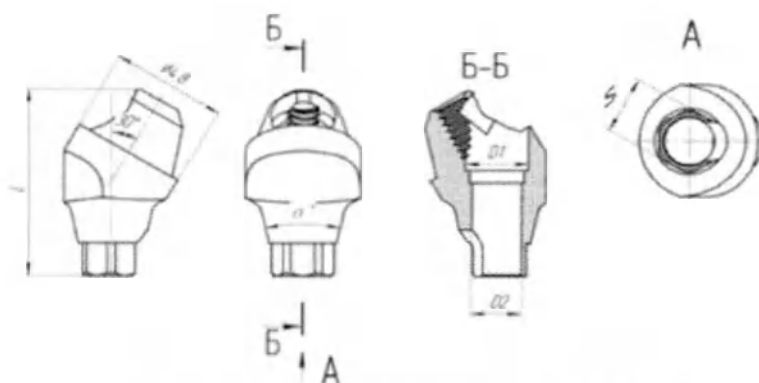


Рисунок 63. Мультиюнит угловой 30°.

Таблица 64 Мультиюнит угловой 30°.

№ в каталоге	α°	$D1$ мм	$D2$ мм	L мм	S мм
0336	$24^\circ+30'$	$2,50\pm0,04$	$1,85\pm0,04$	$7,02^*$	$2,24\pm0,02$
0337	$24^\circ+30'$	$2,50\pm0,04$	$1,85\pm0,04$	$8,02^*$	$2,24\pm0,02$
0340	$24^\circ+30'$	$2,60\pm0,04$	$2,28\pm0,04$	$6,91^*$	$2,65\pm0,02$
0341	$24^\circ+30'$	$2,60\pm0,04$	$2,28\pm0,04$	$7,89^*$	$2,65\pm0,02$

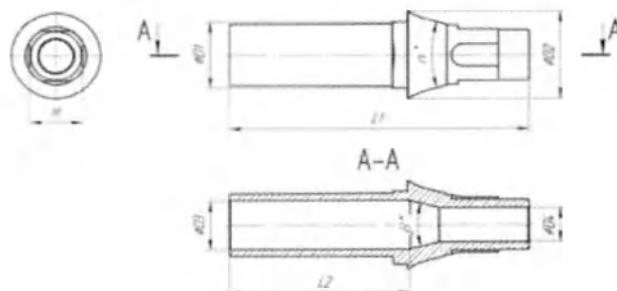


Рисунок 64. Основание удлиненное с фиксацией.

Таблица 65 Основание удлиненное с фиксацией.

№ в каталоге	α°	β°	$D1$ мм	$D2$ мм	$L1$ мм	$D3$ мм	$D4$ мм	$L2$ мм	H мм
0283	$30^\circ+30'$	30°^*	$3,12\pm0,02$	$4,10\pm0,02$	$13,40\pm0,02$	$2,30\pm0,04$	$1,60\pm0,04$	$8,10\pm0,05$	$2,40\pm0,02$

Подп. и дата

Инв. № ду

Взам. инв. №

Подп. и дата

В. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

49

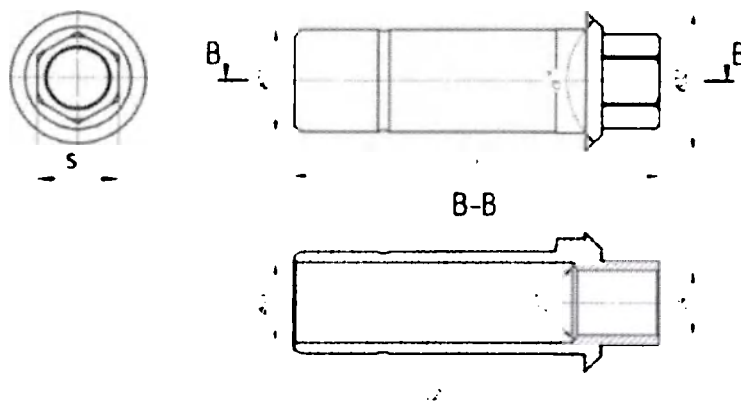


Рисунок 65. Основание удлиненное с фиксацией.

Таблица 66 Основание удлиненное с фиксацией.

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	S мм
0285	$90^\circ+30'$	120°^*	3.00 ± 0.02	4.00 ± 0.02	10.00 ± 0.02	$2.30+0.04$	$1.85+0.04$	7.70 ± 0.05	$2.42-0.02$
0287	$90^\circ+30'$	120°^*	3.30 ± 0.02	5.00 ± 0.02	10.00 ± 0.02	$2.50+0.04$	$1.85+0.04$	7.70 ± 0.05	$2.42-0.02$

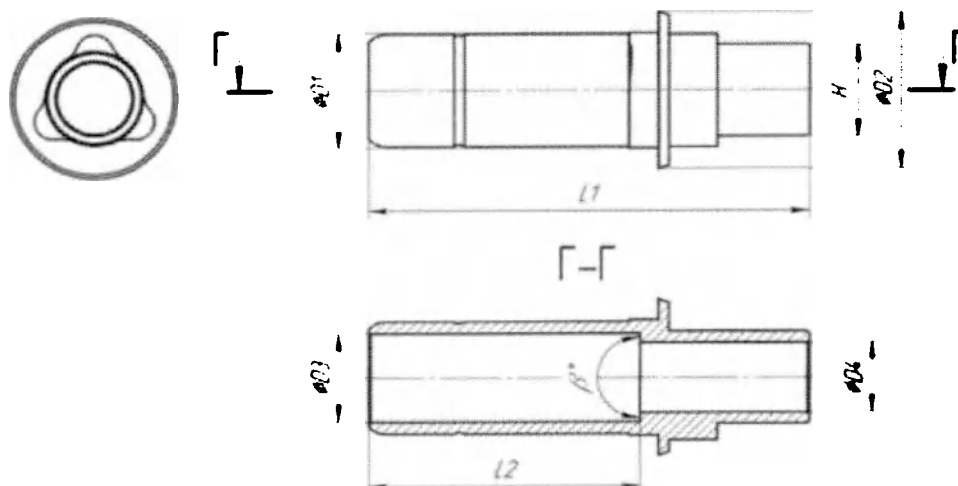


Рисунок 66. Основание удлиненное с фиксацией.

Таблица 67 Основание удлиненное с фиксацией.

№ в каталоге	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм	H мм
0289	180°^*	3.32 ± 0.02	4.50 ± 0.02	12.10 ± 0.02	$2.55+0.04$	$2.02+0.04$	7.50 ± 0.05	$2.65-0.02$
0846	180°^*	3.32 ± 0.02	4.40 ± 0.02	11.27 ± 0.02	$2.55+0.04$	$1.87+0.04$	7.65 ± 0.05	$2.25-0.02$

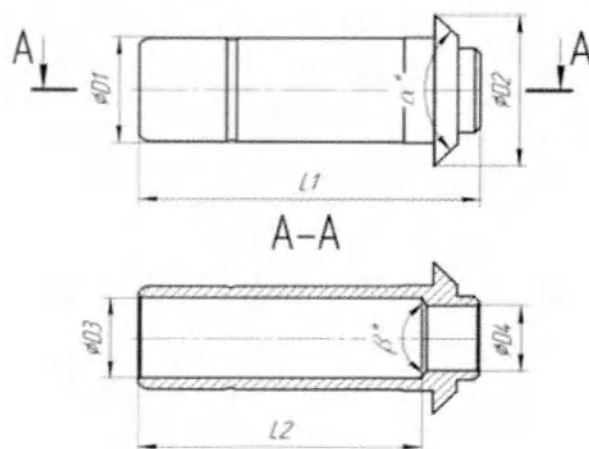


Рисунок 67. Основание удлиненное без фиксации.

Таблица 68 Основание удлиненное без фиксации.

№ в каталоге	α°	β°	D1 мм	D2 мм	L1 мм	D3 мм	D4 мм	L2 мм
0286	90°+30'	120°*	3,00±0,02	4,30±0,02	9,25±0,02	2,30+0,04	1,85+0,04	7,70±0,05
0288	90°+30'	120°*	3,30±0,02	5,00±0,02	9,05±0,02	2,50+0,04	1,85+0,04	7,70±0,05
0492		180°*	3,32±0,02	4,40±0,02	8,97±0,02	2,57+0,04	1,85+0,04	7,64±0,05
0290		180°*	3,32±0,02	4,50±0,02	8,90±0,02	2,57+0,04	2,02+0,04	7,50±0,05
0493		180°*	3,32±0,02	5,50±0,02	9,00±0,02	2,57+0,04	2,02+0,04	7,50±0,05

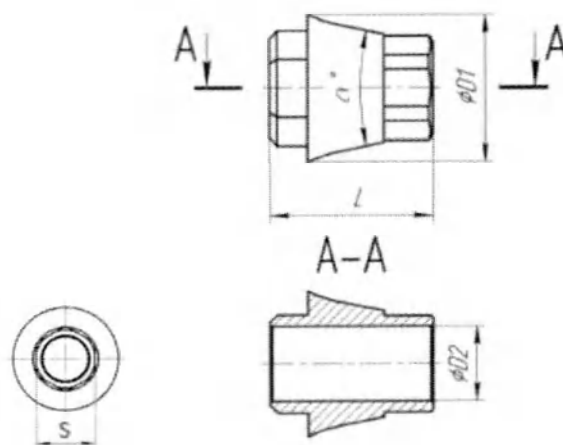


Рисунок 68. Основание для одиночных конструкций.

Таблица 69 Основание для одиночных конструкций.

№ в каталоге	α°	D1 мм	L мм	D2 мм	S мм
0416	24°+30'	3,60±0,02	4,21±0,02	1,60+0,04	2,24-0,02
0487	24°+30'	4,00±0,02	4,30±0,02	2,05+0,04	2,65-0,02

Подп. и дата

Инв. № ду

Взам. инв. №

Подп. и дата

в. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

51

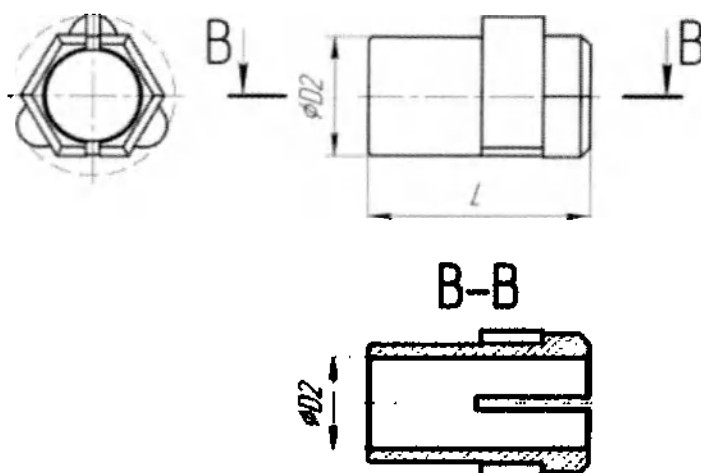


Рисунок 69. Основание для одиночных конструкций.

Таблица 70 Основание для одиночных конструкций.

№ в каталоге	D1 мм	L мм	D2 мм
0024	2,25±0,01	3,89±0,02	1,85±0,04
0025	2,65±0,01	4,75±0,02	2,05±0,04
0026	2,88±0,01	4,75±0,02	2,20±0,04

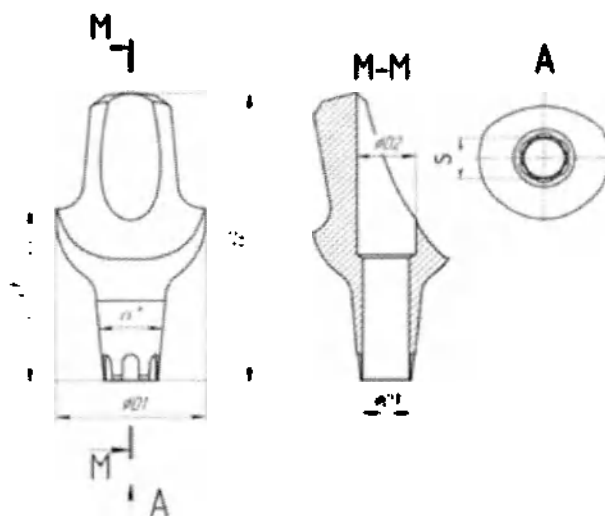


Рисунок 70. Абатмент угловой 15°.

Таблица 71 Абатмент угловой 15°.

№ в каталоге	α°	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм	S мм
0244	11°+30'	5,50±0,02	4,65±0,02	2,20±0,04	1,74±0,04	11,04*	1,82-0,02
0245	11°+30'	5,50±0,02	6,15±0,02	2,20±0,04	1,74±0,04	12,54*	1,82-0,02

Подп. и дата

Инв. № до

Взам. инв. №

Подп. и дата

в. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

52

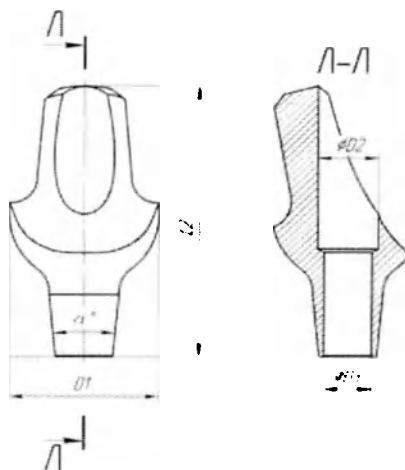


Рисунок 71. Абатмент угловой 15°.

Таблица 72 Абатмент угловой 15°.

№ в каталоге	α°	D1 мм	L1 мм	D2 мм	D3 мм	L2 мм
0242	11°+30'	5,50±0,02	4,00±0,02	2,20+0,04	1,74+0,04	10,39*
0243	11°+30'	5,50±0,02	5,50±0,02	2,20+0,04	1,74+0,04	11,89*

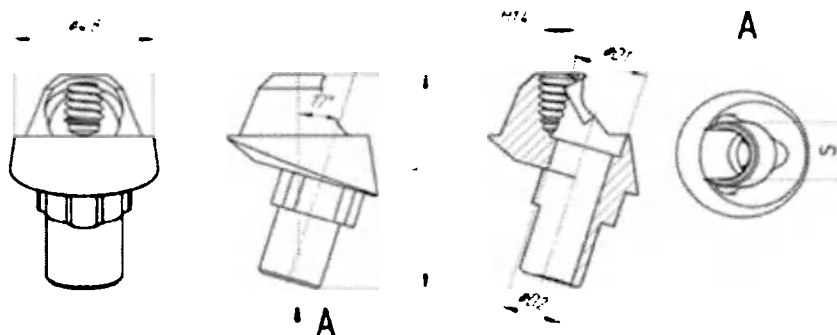


Рисунок 72 Мультиюнит угловой 17°

Таблица 73 Мультиюнит угловой 17°

№ в каталоге	D1	D2	L	S
0324	2,50+0,04	2,00+0,04	7,68*	2,64-0,02
0325	2,50+0,04	2,00+0,04	8,63*	2,64-0,02

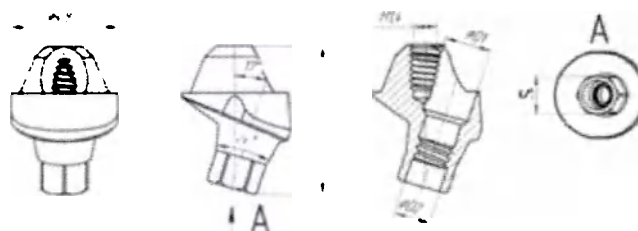


Рисунок 73 Мультиюнит угловой 17°

Таблица 74 Мультиюнит угловой 17°

№ в каталоге	α°	D1	D2	L	S
0909	22°+30'	2,10+0,04	1,65+0,04	6,95*	2,09-0,02
0910	22°+30'	2,10+0,04	1,65+0,04	7,95*	2,09-0,02
0936	22°+30'	2,10+0,04	2,05+0,04	6,40*	2,49-0,02
0937	22°+30'	2,10+0,04	2,05+0,04	7,40*	2,49-0,02

Подп. и дата

Инв. № ду

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

53

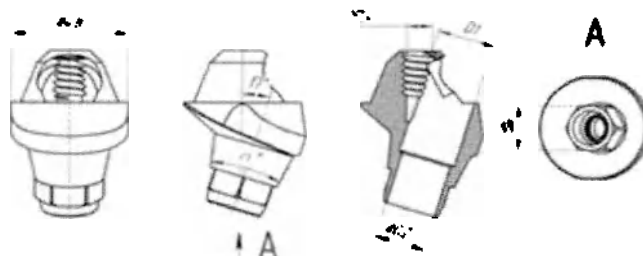


Рисунок 74 Мультиюнит угловой 17°

Таблица 75 Мультиюнит угловой 17°

№ в каталоге	α°	$D1$	$D2$	L	S
0911	22°+30'	2,35+0,04	2,05+0,04	6,70*	2,49-0,02
0912	22°+30'	2,35+0,04	2,05+0,04	7,70*	2,49-0,02

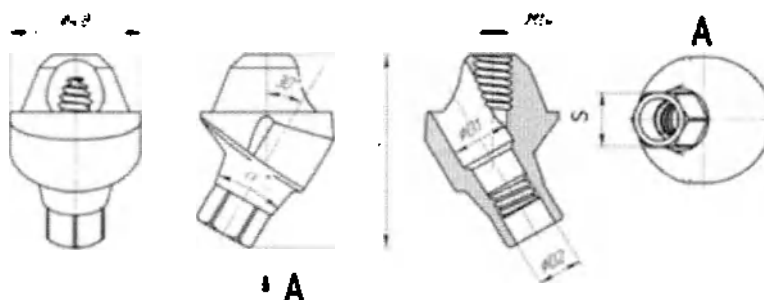


Рисунок 75 Мультиюнит угловой 30°

Таблица 76 Мультиюнит угловой 30°

№ в каталоге	α°	$D1$	$D2$	L	S
0915	22°+30'	2,10+0,04	1,65+0,04	7,10*	2,09-0,02
0916	22°+30'	2,10+0,04	1,65+0,04	8,10*	2,09-0,02
0938	22°+30'	2,10+0,04	2,05+0,04	6,85*	2,49-0,02
0939	22°+30'	2,10+0,04	2,05+0,04	7,85*	2,49-0,02

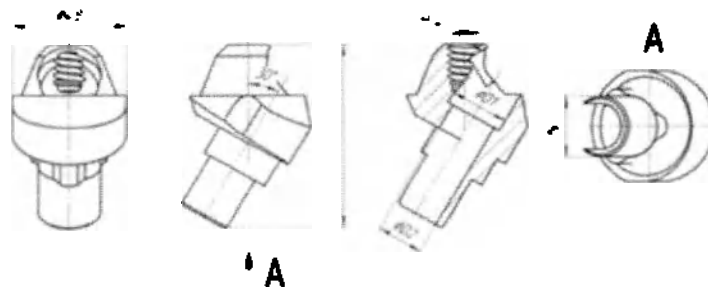


Рисунок 76 Мультиюнит угловой 30°

Таблица 77 Мультиюнит угловой 30°

№ в каталоге	$D1$	$D2$	L	S
0326	2,50+0,04	2,00-0,04	8,02*	2,65-0,02
0327	2,50+0,04	2,00-0,04	8,83*	2,65-0,02

Подп. и дата

Инв. № лу

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

54

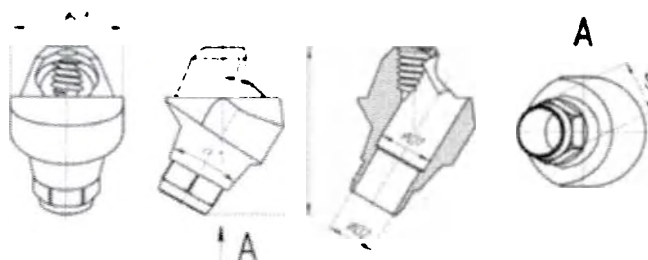


Рисунок 77 Мультиюнит угловой 30°

Таблица 78 Мультиюнит угловой 30°

№ в каталоге	α°	$D1$	$D2$	L	S
0913	22°+30'	2,35+0,04	2,05+0,04	7,25*	2,49-0,02
0914	22°+30'	2,35+0,04	2,05+0,04	8,25*	2,49-0,02

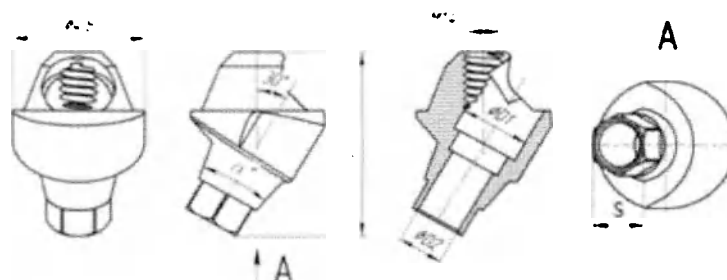


Рисунок 78 Мультиюнит угловой 30°

Таблица 79 Мультиюнит угловой 30°

№ в каталоге	α°	$D1$	$D2$	L	S
0364	22°+30'	2,50+0,04	1,65+0,04	6,80*	2,09-0,02
0365	22°+30'	2,50+0,04	1,65+0,04	7,95*	2,09-0,02
0368	22°+30'	2,50+0,04	2,05+0,04	8,40*	2,49-0,02
0369	22°+30'	2,50+0,04	2,05+0,04	9,40*	2,49-0,02

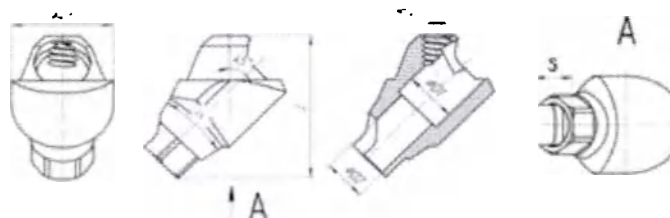


Рисунок 79 Мультиюнит угловой 45°

Таблица 80 Мультиюнит угловой 45°

№ в каталоге	α°	$D1$	$D2$	L	S
0919	24°+30'	2,50+0,04	2,05+0,04	7,30*	2,65-0,02
0920	24°+30'	2,50+0,04	2,05+0,04	8,30*	2,65-0,02
0932	24°+30'	2,50+0,04	1,85+0,04	7,30*	2,24-0,02
0933	24°+30'	2,50+0,04	1,85+0,04	8,30*	2,24-0,02

Подп. и дата

Инт. № д

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

55

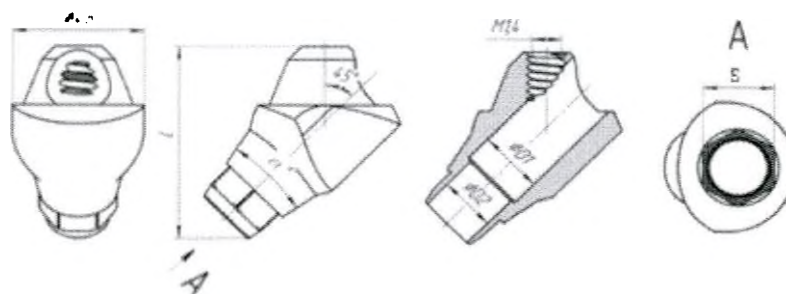


Рисунок 80 Мультиюнит угловой 45°

Таблица 81 Мультиюнит угловой 45°

№ в каталоге	α°	$D1$	$D2$	L	S
0918	22°+30'	2,35+0,04	2,05+0,04	7,60*	2,49-0,02
0934	22°+30'	2,35+0,04	2,05+0,04	8,60*	2,49-0,02

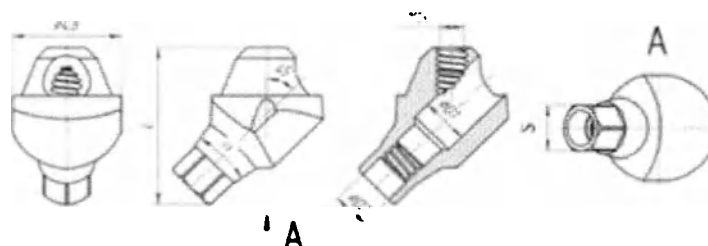


Рисунок 81 Мультиюнит угловой 45°

Таблица 82 Мультиюнит угловой 45°

№ в каталоге	α°	$D1$	$D2$	L	S
0917	22+30'	2,10+0,04	1,65+0,04	7,60*	2,09-0,02
0935	22+30'	2,10+0,04	1,65+0,04	7,70*	2,09-0,02
0940	22+30'	2,10+0,04	2,05+0,04	7,22*	2,49-0,02
0941	22+30'	2,10+0,04	2,05+0,04	8,22*	2,49-0,02

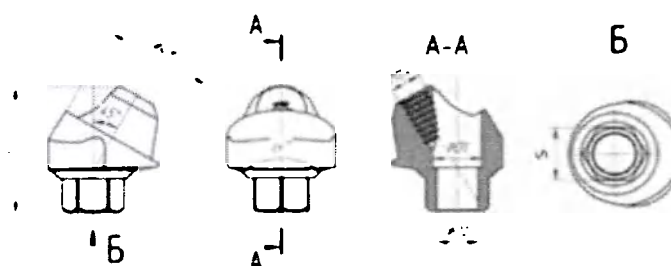


Рисунок 82 Мультиюнит угловой 45°.

Таблица 83 Мультиюнит угловой 45°.

№ в каталоге	α°	$D1$	$D2$	L	S
0947	90°+30'	2,20+0,04	1,85+0,04	6,80*	2,42-0,02
0948	90°+30'	2,20+0,04	1,85+0,04	7,80*	2,42-0,02
0949	90°+30'	2,20+0,04	1,85+0,04	7,30*	2,42-0,02
0950	90°+30'	2,20+0,04	1,85+0,04	8,30*	2,42-0,02

Подп. и дата	
Инв. № ду	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
в. № подл.	

32.50.22 ИП

Лист

56

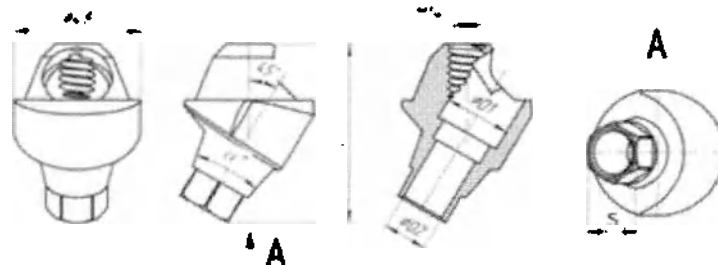


Рисунок 83 Мультиюнит угловой 45°.

Таблица 84 Мультиюнит угловой 45°.

№ в каталоге	α°	$D1$	$D2$	L	S
0943	22°+30'	2,50+0,04	1,65+0,04	7,25*	2,09-0,02
0944	22°+30'	2,50+0,04	1,65+0,04	8,25*	2,09-0,02
0945	22°+30'	2,50+0,04	2,05+0,04	8,75*	2,49-0,02
0946	22°+30'	2,50+0,04	2,05+0,04	9,75*	2,49-0,02

1.3 Технические характеристики

- изделия протетические при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 20790-93 для исполнения У6, при номинальных значениях температуры 32...42° С.

- изделия протетические при эксплуатации устойчивы к воздействию механических факторов по ГОСТ 20790-93 для группы 2.

- изделия протетические в транспортной упаковке при транспортировании устойчивы к климатическим факторам в соответствии ГОСТ 15150-69 для условий хранения 5.

- изделия протетические в транспортной упаковке устойчивы к механическим воздействиям при транспортировании и соответствуют требованиям ГОСТ 20790-93 группа 3.

- изделия протетические, изготовленные из титана, коррозионностойкие.

- параметр R_a шероховатости наружных поверхностей изделий протетических не более 0,80 мкм по ГОСТ 2789-73 для изделий из титана и 3,6 мкм для изделий из пластика, остальных поверхностей - в соответствии с требованиями конструкторской документации. Изделия протетические устойчивы к воздействию биологических жидкостей организма человека (слюны).

1.1.11 Изделия протетические должны быть подготовлены и стерилизованы в клинике по режимам МУ-287-113 на оборудовании клиники подготовленного в соответствии с ГОСТ Р ИСО 17665-1-2016.

- **предварительная очистка:**

а) без разведения Сайдекс время обработки 15 минут или

- **дезинфекция:**

а) без разведения Сайдекс время обработки от 15 мин. до 90 мин. в зависимости от вида инфекции б) без разведения Гротанат Борербад, время обработки 30 мин.

в) без разведения ИД220, время обработки 30 мин. МУ 287-113. Таб. 2.2

- **предстерилизационная очистка:** а) 0,5% Биолот; б) 1% Велтолен; в) 0,15% Септабик; г) 0,2% Септодор МУ 287-113. Таблица 3.1

- **стерилизация** - в автоклавах водяным насыщенным паром под избыточным давлением.

Режимы стерилизации:

1,1 атм., $t=120^\circ\text{C}$, 45 мин.

Подп. и дата

Изм. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

в. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

57

Изделия стерилизуют упакованными в стерилизационные упаковочные материалы, а также используют стерилизационные коробки без фильтров и с фильтрами. Упаковочные материалы должны иметь разрешения для использования их на территории РФ.

- изделия протетические (абатменты прямые, мультиюниты, основания, винты,) изготавливаются из особо чистого титанового сплава BT6

1.4. Разъяснение символов маркировки.

Символ	Описание
	Номер по каталогу
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Не допускать воздействия влаги
	Осторожно

1.5 Комплектность

1.5.1 Комплект поставки изделий протетических в соответствии с п.3 данной инструкции должен включать:

- изделие протетическое одного наименования – 1 шт.;
- винт одного наименования – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

1.6 Обстоятельства, при которых потребитель должен проконсультироваться с медицинским работником.

1.6.1 Информация о состоянии здоровья больного: его заболевании, результатах обследования, прогнозе заболевания, возможных осложнениях заболевания, включая отдаленные последствия.

1.6.2 Информация о медицинском вмешательстве: методах лечения, связанном с лечением риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, в том числе применения изделий протетических, его результатах и последствиях, включая отдаленные последствия.

1.6.3 Информация о правах и обязанностях пациента. Информация о медицинской организации, осуществляющей медицинское вмешательство.

1.7 Требования безопасности

Все используемые при изготовлении материалы безопасны и имеют заключение о безопасности использования в соответствии с ГОСТ ISO 10993.

1.8 Правила хранения

Хранятся изделия протетические в упаковке изготовителя по условиям хранения 5 (при температуре от -50°C до 50°C) по ГОСТ 15150-69.

Срок хранения изделия -1 год.

1.9 Транспортирование

1.9.1 Транспортирование изделий протетических в упаковке изготовителя производится всеми видами крытого транспорта, кроме неотапливаемых отсеков самолетов и морского транспорта, и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

1.9.2 Условия транспортирования изделий протетических - по условиям хранения 5 (при температуре от -50°C до 50°C) по ГОСТ 15150-69.

1.10 Указания по эксплуатации

Подп. и дата	Инв. № дс	Взам. инв. №	Подп. и дата	в. № подл.	32.50.22 ИП	Лист
						58
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 1. Дата						

в. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № ду	Подп. и дата

					32.50.22 ИП	Лист
						59
INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU . Дата						

- Направляют в зуботехническую лабораторию помимо слепочного трансфера и слепка имплантата информацию о челюсти-антагонисте и оттенке.

2.1.3 Лабораторные процедуры (Зубной техник)

- Убеждаются, что слепочный материал лишен трещин и пузырей.
- Устанавливают соответствующий лабораторный аналог имплантата на слепок имплантата и подготавливают мастер-модель жесткого гипса.
- Выбирают прямой или угловой абатмент и помещают его в лабораторный аналог имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Изготавливают конструкцию в соответствии с инструкцией изготовителя по эксплуатации материалов.
- Проверяют правильность посадки и состояние контактных точек конструкции.

2.1.4 Фиксация абатмента (Врач-стоматолог)

Примечание: для соблюдения надлежащей прочности и соответствующих размеров, никогда не изменяйте имплантатный разъем абатмента.

- Убеждаются, что платформа имплантата лишена каких-либо остатков мягкой или костной ткани.
- Устанавливают абатмент на имплантат и закрепляют винт в имплантате с помощью подходящей отвертки.
- Снятие рентгеновского снимка зубов может быть полезным для подтверждения точной посадки абатмента.
- С помощью ключа-трещотки затягивают винт согласно рекомендованному усилию на винт, указанному в таблице 92 настоящей инструкции.

2.1.5 Цементирование окончательного протеза (Врач-стоматолог)

- Аккуратно устанавливают протез на абатмент и проверяют окклюзионный и межзубной контакт. Протез должен находиться в состоянии легкой окклюзии. Жевательная поверхность должна быть минимальной.
- Заполняют канал доступа к винту абатмента блокирующим материалом, чтобы сохранить доступ к винту абатмента.
- Цементируют протез с использованием постоянного цемента в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя цемента.

2.2 Мультиюнит угловой:

2.2.1 Мультиюнит-абатмент используется для фиксации одиночных реставраций и мостовидных конструкций

Допускается:

- цементная фиксация протеза и винтовая фиксация;
- Установка протеза для одного или нескольких зубов

2.2.2 Слепок поверхности имплантата (Врач-стоматолог) (повторить п.2.1.2)

2.2.3 Лабораторные процедуры (Зубной техник) (повторить п.2.1.3)

2.2.4 Фиксация абатмента (Врач-стоматолог) (повторить п.2.1.4)

Цементирование окончательного протеза (Врач-стоматолог) (повторить п.2.1.5)

2.3. Основание с фиксацией/без фиксации:

2.3.1 Титановое основание с фиксацией используется для обеспечения промежуточного уровня между дентальным имплантатом и коронкой, изготовленной с использованием компьютерных программ проектирования и моделирования (CAD/ CAM)

Допускается:

- винтовая фиксация;
- Установка протеза для одного или нескольких зубов

2.3.2 Слепок поверхности основания (Врач-стоматолог)

- Снимают формирователь десны или временную конструкцию с имплантата.
- С помощью пульверизатора распыляют воздух / воду на разъем имплантата, после чего высушивают его.

в. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № ду	Подп. и дата	Подп. и дата

000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	1.	Дата	

32.50.22 ИП

Лист

60

- Подбирают слепочный трансфер и помещают его в одну из возможных индексаций положения имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Имея необходимый материал, снимают слепок поверхности имплантата.
- Направляют в зуботехническую лабораторию помимо слепочного трансфера и слепка имплантата информацию о челюсти-антагонисте и оттенке.

2.3.3 Лабораторные процедуры (Зубной техник)

- Убеждаются, что слепочный материал лишен трещин и пузырей.
- Устанавливают соответствующий лабораторный аналог имплантата на слепок имплантата и подготавливают мастер-модель жесткого гипса.
- Выбирают основание и помещают его в лабораторный аналог имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Изготавливают конструкцию в соответствии с инструкцией изготовителя по эксплуатации материалов.
- Проверяют правильность посадки и состояние контактных точек конструкции.

2.3.4 Склеивание основания титанового (Зубной техник)

- Вставляют основание титановое в лабораторный аналог имплантата и заполняют винтовой канал воском.
- Проводят пескоструйную обработку оксидом алюминия (ПО мкм, 2 бар) соединяемых поверхностей основания титанового и циркониевого основания или мостовидного протеза, после чего очищают поверхности.
- Наносят адгезивный клей на склеиваемую поверхность основания титанового в соответствии с рекомендациями производителя.
- Помещают циркониевый абатмент или мостовидный протез на основание титановое и обеспечивают корректное соединение.
- Удаляют излишки адгезивного клея и воска

2.3.5 Фиксация основания (Врач-стоматолог)

Примечание: для соблюдения надлежащей прочности и соответствующих размеров, никогда не изменяйте имплантатный разъем основания.

- Убеждаются, что разъем имплантата лишён каких-либо остатков мягкой или костной ткани.
- Устанавливают основание или многокомпонентную конструкцию на имплантат и закрепляют винт в имплантате с помощью подходящей отвертки.
- Снятие рентгеновского снимка зубов может быть полезным для подтверждения точной посадки основания.
- С помощью ключа-трещотки затягивают винт согласно рекомендованному усилию на винт, указанному в таблице 92 настоящей инструкции.

2.3.6 Цементирование окончательного протеза (Врач-стоматолог)

- Аккуратно устанавливают протез на основание и проверяют окклюзионный и межзубной контакт. Протез должен находиться в состоянии легкой окклюзии. Жевательная поверхность должна быть минимальной.
- Заполняют канал доступа к винту основания блокирующим материалом, чтобы сохранить доступ к винту основания.
- Цементируют протез с использованием постоянного цемента в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя цемента.

2.4 Винт:

2.4.1 Винт используется для прикрепления абатмента/ основания/ мультиюнит-абатмента к имплантату или аналогу. При использовании винта необходимо соблюдать рекомендуемое усилие на винт (таблица 92)

в.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № д/у	Подп. и дата

000 ЦИРМИ					Дата

Таблица 92 – Рекомендуемое усилие на винт

Усилие на винт Н/см	№ в каталоге
20 Н/см	0138
15 Н/см	0257
25 Н/см	0249
20 Н/см	0248
20 Н/см	0137
24 Н/см	0140
15 Н/см	0085
20 Н/см	0431
30 Н/см	0432
30 Н/см	0254
35 Н/см	0255
15 Н/см	0297
25 Н/см	0139
35 Н/см	0256
35 Н/см	0119
35 Н/см	0122
35 Н/см	0120
35 Н/см	0123
15 Н/см	0307
35 Н/см	0215
35 Н/см	0813
35 Н/см	0814
35 Н/см	0216
30 Н/см	0462
15 Н/см	0929
20 Н/см	0931
30 Н/см	0942
30 Н/см	0134
20 Н/см	0811
25 Н/см	0812
25 Н/см	0930
15 Н/см	0374-01
15 Н/см	0374-02
15 Н/см	0374-03
30 Н/см	0504
15 Н/см	0561
15 Н/см	0560

3 Комплект поставки

Изделия протетические для систем дентальной имплантации «УЛЬТРАСТОМ» по ТУ 32.50.22– 002 – 94681064 – 2020 варианты исполнения:

1 Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0207 с винтом M1,6 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0215 в составе:

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0207 – 1 шт.
- Винт M1.6 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0215– 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

В.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № д/у	Подп. и дата

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0208 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0215– 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF - 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0216– 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0210 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0216– 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка - 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Osstem – REF 0428 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Osstem – REF 0431 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка - 1 шт.

- Абтмент прямой стандартный, совместимый с системой Osstem – REF 0427 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Osstem – REF 0431 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Osstem – REF 0426 – 1 шт.
- Винт M1.6 совместимый с системой Osstem – REF 0431 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Osstem – REF 0464– 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Osstem – REF 0432– 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абтмент прямой стандартный, совместимый с системой Osstem – REF 0465 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Osstem – REF 0432 - 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абтмент прямой стандартный, совместимый с системой Osstem – REF 0466 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Osstem – REF 0432 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Лист
63

11 Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Osstem – REF 0463 с винтом M2 совместимым с системой Osstem – REF 0432 в составе:

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Osstem – REF 0463 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Osstem – REF 0432 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

12 Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Astra Tech – REF 0091 с винтом M1,6 совместимым с системой Astra Tech – REF 0138 в составе:

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Astra Tech – REF 0091 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Astra Tech – REF 0138 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

13 Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Astra Tech – REF 0135 с винтом M1,6 совместимым с системой Astra Tech – REF 0138 в составе:

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Astra Tech – REF 0135 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Astra Tech – REF 0138 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

14 Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Astra Tech – REF 0092 с винтом M2 совместимым с системой Astra Tech – REF 0139 в составе:

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Astra Tech – REF 0092 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Astra Tech – REF 0139 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

15 Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Astra Tech – REF 0136 с винтом M2 совместимым с системой Astra Tech – REF 0139 в составе:

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Astra Tech – REF 0136 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Astra Tech – REF 0139 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

16 Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Dentium – REF 0217 с винтом M2 совместимым с системой Dentium – REF 0249 в составе:

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Dentium – REF 0217 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Dentium – REF 0249 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

17 Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Dentium – REF 0218 с винтом M2 совместимым с системой Dentium – REF 0249 в составе:

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Dentium – REF 0218 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Dentium – REF 0249 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

18 Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Astra Tech – REF 0223 с винтом M1,4 совместимым с системой Astra Tech – REF 0257 в составе:

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Astra Tech – REF 0223 – 1 шт.
- Винт M1,4 совместимый с системой Astra Tech – REF 0257 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

19 Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Astra Tech – REF 0224 с винтом M1,4 совместимым с системой Astra Tech – REF 0257 в составе:

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Astra Tech – REF 0224 – 1 шт.
- Винт M1,4 совместимый с системой Astra Tech – REF 0257 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

№ п/п	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № д	Подп. и дата	32.50.22 ИП	Лист
						64
000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	Дата			

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Ankylos – REF 0230 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Ankylos:– REF 0231 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Ankylos:– REF 0232 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0059 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0134 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0060 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0134 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0061 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0134 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0062 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0134 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Mis C1 – REF 0306 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой шестигранное соединение и Mis C1 – REF 0297 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Mis CI – REF 0314 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой шестигранное соединение и Mis CI – REF 0297 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

					32.50.22 ИП	Лист
						65
				Дата		

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Mis C1 – REF 0298 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Mis C1 – REF 0462 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Mis C1 – REF 0299 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Mis C1 – REF 0462 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Mis C1 – REF 0300 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Mis C1 – REF 0462 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Mis C1 – REF 0301 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Mis C1 – REF 0462 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Replace – REF 0002 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0120 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Replace – REF 0006 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0120 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Replace – REF 0003 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0120 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Replace – REF 0007 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0120 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Replace – REF 0001 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0119 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

[illegible]

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Replace – REF 0005 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0119 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0073 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0256 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0074 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0256 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0075 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0256 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Straumann Bone Level – REF – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0256 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Ankylos – REF 0233 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Ankylos – REF 0234 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Ankylos – REF 0235 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Ankylos- REF 0236 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

67

46 Абатмент прямой стандартный, 43° для мультиюнита – REF 0484 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Абатмент прямой стандартный, 43° для мультиюнита – REF 0484 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

47 Абатмент прямой стандартный, 43° для мультиюнита – REF 0484 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Абатмент прямой стандартный, 43° для мультиюнита – REF 0484 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

48 Абатмент прямой стандартный, 43° для мультиюнита – REF 0484 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Абатмент прямой стандартный, 43° для мультиюнита – REF 0484 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

49 Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Straumann Synocta – REF 0084 с винтом M2 совместимым с системой Straumann Synocta – REF 0255 в составе:

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Straumann Synocta – REF 0084 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Straumann Synocta – REF 0255 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

50 Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Biomet 3i – REF 0047 с винтом M1,6 совместимым с системой Biomet 3i – REF 0137 в составе:

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Biomet 3i – REF 0047 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Biomet 3i – REF 0137 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

51 Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Biomet 3i – REF 0279 с винтом M1,6 совместимым с системой Biomet 3i – REF 0137 в составе:

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Biomet 3i – REF 0279 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Biomet 3i – REF 0137 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

52 Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Biomet 3i – REF 0048 с винтом M1,6 совместимым с системой Biomet 3i – REF 0137 в составе:

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Biomet 3i – REF 0048 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Biomet 3i – REF 0137 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

53 Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Biomet 3i – REF 0280 с винтом M1,6 совместимым с системой Biomet 3i – REF 0137 в составе:

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Biomet 3i – REF 0280 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Biomet 3i – REF 0137 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

54 Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0101 с винтом M1,6 совместимым с системой Xive/Friadent – REF 0140 в составе:

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0101 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Подп. и дата	
Инв. № д	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
в. № подл.	

32.50.22 ИП

Лист

68

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0258 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0102 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0259 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0103 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0260 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0261 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0262 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Основание с фиксацией совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0110 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Основание с фиксацией совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0111 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

[illegible]

64 Основание с фиксацией совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0112 с винтом M1,6 совместимым с системой Xive/Friadent – REF 0140 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0112 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

65 Основание с фиксацией совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0113 с винтом M1,6 совместимым с системой Xive/Friadent – REF 0140 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0113 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

66 Основание с фиксацией совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0081 с винтом M1,6 совместимым с системой Straumann Bone Level – REF 0256 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0081 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0256 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

67 Основание с фиксацией совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0082 с винтом M1,6 совместимым с системой Straumann Bone Level – REF 0256 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0082 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0256 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

68 Основание с фиксацией совместимое с системой Osstem – REF 0429 с винтом M1,6 совместимым с системой Osstem – REF 0431 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Osstem – REF 0429 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Osstem – REF 0431 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

69 Основание с фиксацией совместимое с системой Osstem – REF 0430 с винтом M2 совместимым с системой Osstem – REF 0432 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Osstem – REF 0430 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Osstem – REF 0432 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

70 Основание с фиксацией совместимое с системой Nobel Replace – REF 0017 с винтом M1,8 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0119 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Nobel Replace – REF 0017 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0119 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

71 Основание с фиксацией совместимое с системой Nobel Replace – REF 0018 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0120 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Nobel Replace – REF 0018 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0120 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

72 Основание с фиксацией совместимое с системой Nobel Replace – REF 0019 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0120 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Nobel Replace – REF 0019 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0120 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Подп. и дата	Инв. № д	Взам. инв. №	Подп. и дата	В. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

70

73 Основание с фиксацией совместимое с системой Dentium – REF 0225 с винтом M2 совместимым с системой Dentium – REF 0249 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Dentium – REF 0225 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Dentium – REF 0249 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

74 Основание с фиксацией совместимое с системой Astra Tech – REF 0097 с винтом M1,6 совместимым с системой Astra Tech – REF 0138 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Astra Tech – REF 0097 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Astra Tech – REF 0138 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

75 Основание с фиксацией совместимое с системой Astra Tech – REF 0098 с винтом M2 совместимым с системой Astra Tech – REF 0139 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Astra Tech – REF 0098 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Astra Tech – REF 0139 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

76 Основание с фиксацией совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0203 с винтом M1,6 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0215 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0203 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0215 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

77 Основание с фиксацией совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0204 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0216 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0204 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0216 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

78 Основание с фиксацией совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0090 с винтом M2 совместимым с системой Straumann Synocta – REF 0255 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0090 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Straumann Synocta – REF 0255 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

79 Основание с фиксацией совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0155 с винтом M2 совместимым с системой Straumann Synocta – REF 0255 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0155 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Straumann Synocta – REF 0255 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

80 Основание с фиксацией совместимое с системой Ankylos – REF 0246 с винтом M1,8 совместимым с системой Ankylos – REF 0248 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Ankylos – REF 0246 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

81 Основание с фиксацией совместимое с системой Ankylos – REF 0272 с винтом M1,8 совместимым с системой Ankylos – REF 0248 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Ankylos – REF 0272 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Подп. и дата	
Инв. № дс	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

32.50.22 ИП

Лист

71

91 Основание с фиксацией совместимое с системой Biomet 3i – REF 0053 с винтом M1,6 совместимым с системой Biomet 3i – REF 0137 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Biomet 3i – REF 0053 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Biomet 3i – REF 0137 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

92 Основание с фиксацией совместимое с системой Biomet 3i – REF 0054 с винтом M1,6 совместимым с системой Biomet 3i – REF 0137 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Biomet 3i – REF 0054 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Biomet 3i – REF 0137 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

93 Основание с фиксацией совместимое с системой Biomet 3i – REF 0055 с винтом M1,6 совместимым с системой Biomet 3i – REF 0137 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Biomet 3i – REF 0055 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Biomet 3i – REF 0137 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

94 Основание с фиксацией совместимое с системой Astra Tech – REF 0227 с винтом M1,4 совместимым с системой Astra Tech – REF 0257 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Astra Tech – REF 0227 – 1 шт.
- Винт M1,4 совместимый с системой Astra Tech – REF 0257 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

95 Основание с фиксацией совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0295 с винтом M1,4 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0307 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0295 – 1 шт.
- Винт M1,4 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0307 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

96 Основание с фиксацией совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0291 с винтом M1,6 совместимым с системой шестигранное соединение и Mis C1 – REF 0297 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0291 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой шестигранное соединение и Mis C1 – REF 0297 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

97 Основание с фиксацией совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0089 с винтом M1,8 совместимым с системой Straumann Synocta – REF 0254 в составе:

- Основание с фиксацией совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0089 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Straumann Synocta – REF 0254 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

98 Основание без фиксации совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0070 с винтом M1,8 совместимым с системой шестигранное соединение – REF 0134 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0070 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0134 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

99 Основание без фиксации совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0071 с винтом M1,8 совместимым с системой шестигранное соединение – REF 0134 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0071 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0134 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Подп. и дата	
Инв. № д.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
В. № подл.	

000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	Дата		

32.50.22 ИП

Лист

73

100 Основание без фиксации совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0072 с винтом M1,8 совместимым с системой шестигранное соединение – REF 0134 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0072 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0134 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

101 Основание без фиксации совместимое с системой Nobel Replace – REF 0274 с винтом M1,8 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0119 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Nobel Replace – REF 0274 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0119 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

102 Основание без фиксации совместимое с системой Nobel Replace – REF 0022 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0120 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Nobel Replace – REF 0022 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0120 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

103 Основание без фиксации совместимое с системой Nobel Replace – REF 0023 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0120 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Nobel Replace – REF 0023 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0120 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

104 Основание без фиксации совместимое с системой Nobel Replace – REF 0275 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0120 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Nobel Replace – REF 0275 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0120 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

105 Основание без фиксации совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0114 с винтом M1,6 совместимым с системой Xive/Friadent – REF 0140 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0114 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

106 Основание без фиксации совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0115 с винтом M1,6 совместимым с системой Xive/Friadent – REF 0140 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0115 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

107 Основание без фиксации совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0116 с винтом M1,6 совместимым с системой Xive/Friadent – REF 0140 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0116 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

108 Основание без фиксации совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0276 с винтом M1,6 совместимым с системой Xive/Friadent – REF 0140 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0276 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

в.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № д/у	Подп. и дата	32.50.22 ИП	Лист
						74
000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU						Дата

109 Основание без фиксации совместимое с системой Biomet 3i – REF 0056 с винтом M1,6 совместимым с системой Biomet 3i – REF 0137 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Biomet 3i – REF 0056 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Biomet 3i – REF 0137 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

110 Основание без фиксации совместимое с системой Biomet 3i – REF 0057 с винтом M1,6 совместимым с системой Biomet 3i – REF 0137 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Biomet 3i – REF 0057 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Biomet 3i – REF 0137 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

111 Основание без фиксации совместимое с системой Astra Tech – REF 0228 с винтом M1,4 совместимым с системой Astra Tech – REF 0257 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Astra Tech – REF 0228 – 1 шт.
- Винт M1,4 совместимый с системой Astra Tech – REF 0257 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

112 Основание без фиксации совместимое с системой Astra Tech – REF 0099 с винтом M1,6 совместимым с системой Astra Tech – REF 0138 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Astra Tech – REF 0099 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Astra Tech – REF 0138 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

113 Основание без фиксации совместимое с системой Astra Tech – REF 0100 с винтом M2 совместимым с системой Astra Tech – REF 0139 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Astra Tech – REF 0100 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Astra Tech – REF 0139 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

114 Основание без фиксации совместимое с Dentium – REF 0226 с винтом M2 совместимым с системой Dentium – REF 0249 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с Dentium – REF 0226 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Dentium – REF 0249 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

115 Основание без фиксации совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0205 с винтом M1,6 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0215 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0205 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0215 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

116 Основание без фиксации совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0206 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0216 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0216 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

117 Основание без фиксации совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0296 с винтом M1,4 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0307 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0296 – 1 шт.
- Винт M1,4 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0307 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Подп. и дата	
Инв. № д	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
в. № подл.	

32.50.22 ИП

Лист

75

118 Основание без фиксации совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0156 с винтом M1,6 совместимым с системой Straumann Bone Level – REF 0256 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0156 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0256 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

119 Основание без фиксации совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0157 с винтом M1,6 совместимым с системой Straumann Bone Level – REF 0256 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0157 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0256 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

120 Основание без фиксации совместимое с системой Ankylos – REF 0247 с винтом M1,8 совместимым с системой Ankylos – REF 0248 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Ankylos – REF 0247 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

121 Основание без фиксации совместимое с системой Ankylos – REF 0273 с винтом M1,8 совместимым с системой Ankylos – REF 0248 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Ankylos – REF 0273 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

122 Основание без фиксации совместимое с системой Mis C1 – REF 0202 с винтом M1,8 совместимым с системой Mis C1 – REF 0462 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Mis C1 – REF 0202 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Mis C1 – REF 0462 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

123 Основание без фиксации совместимое с системой Mis C1 – REF 0294 с винтом M1,8 совместимым с системой Mis C1 – REF 0462 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Mis C1 – REF 0294 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Mis C1 – REF 0462 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

124 Основание без фиксации совместимое с системой Mis C1 – REF 0588 с винтом M1,8 совместимым с системой Mis C1 – REF 0462 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Mis C1 – REF 0588 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Mis C1 – REF 0462 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

125 Основание без фиксации совместимое с системой Mis C1 – REF 0587 с винтом M1,8 совместимым с системой Mis C1 – REF 0462 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Mis C1 – REF 0587 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Mis C1 – REF 0462 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

126 Основание без фиксации совместимое с системой Mis C1 – REF 0767 с винтом M1,8 совместимым с системой Mis C1 – REF 0462 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Mis C1 – REF 0767 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Mis C1 – REF 0462 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

в.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дс	Подп. и дата	32.50.22 ИП	Лист
						76
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU						Дата

127 Основание без фиксации совместимое с системой Mis C1 – REF 0768 с винтом M1,8 совместным с системой Mis C1 – REF 0462 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Mis C1 – REF 0768 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Mis C1 – REF 0462 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

128 Основание без фиксации совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0284 с винтом M1,6 совместным с системой шестигранное соединение и Mis C1 – REF 0297 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0284 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой шестигранное соединение и Mis C1 – REF 0297 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

129 Основание без фиксации совместимое с системой Osstem – REF 0478 с винтом M1,6 совместным с системой Osstem – REF 0431 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Osstem – REF 0478 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Osstem – REF 0431 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

130 Основание без фиксации совместимое с системой Osstem – REF 0433 с винтом M2 совместным с системой Osstem – REF 0432 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Osstem – REF 0433 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Osstem – REF 0432 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

131 Основание без фиксации совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0159 с винтом M2 совместным с системой Straumann Synocta – REF 0255 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0159 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Straumann Synocta – REF 0255 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

132 Основание без фиксации совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0160 с винтом M2 совместным с системой Straumann Synocta – REF 0255 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0160 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Straumann Synocta – REF 0255 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

133 Основание без фиксации конус 43° для мультиюнита -REF 0477 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Основание без фиксации конус 43° для мультиюнита -REF 0477 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

134 Основание без фиксации конус 43° для мультиюнита -REF 0477 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Основание без фиксации конус 43° для мультиюнита -REF 0477 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

135 Основание без фиксации конус 43° для мультиюнита -REF 0477 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Основание без фиксации конус 43° для мультиюнита -REF 0477 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Подп. и дата

Имп. № до

Взам. инв. №

Подп. и дата

в. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

77

136 Основание без фиксации конус 30° для мультиюнита совместимое с системой Ankylos – REF 0483 с винтом M1,6 для мультиюнита – REF 0085 в составе:

- Основание без фиксации конус 30° для мультиюнита совместимое с системой Ankylos – REF 0483 – 1 шт.
- Винт M1,6 для мультиюнита – REF 0085 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

137 Основание без фиксации совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0158 с винтом M1,8 совместимым с системой Straumann Synocta – REF 0254 в составе:

- Основание без фиксации совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0158 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Straumann Synocta – REF 0254 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

138 Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0200 с винтом M1,8 совместимым с системой шестигранное соединение – REF 0134 в составе:

- Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0200 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0134 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

139 Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0201 с винтом M1,8 совместимым с системой шестигранное соединение – REF 0134 в составе:

- Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0201 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0134 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

140 Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Nobel Replace – REF 0171 с винтом M1,8 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0119 в составе:

- Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Nobel Replace – REF 0171 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0119 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

141 Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Nobel Replace – REF 0267 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0120 в составе:

- Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Nobel Replace – REF 0267 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0120 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

142 Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Nobel Replace – REF 0268 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0120 в составе:

- Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Nobel Replace – REF 0268 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0120 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

143 Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой с Xive/Friadent – REF 0183 с винтом M1,6 совместимым с системой Xive/Friadent – REF 0140 в составе:

- Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой с Xive/Friadent – REF 0183 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

144 Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой с Xive/Friadent – REF 0184 с винтом M1,6 совместимым с системой Xive/Friadent – REF 0140 в составе:

- Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой с Xive/Friadent – REF 0184 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Подп. и дата

Инв. № д

Взам. инв. №

Подп. и дата

в. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

78

145 Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой с Xive/Friadent – REF 0193 с винтом M1,6 совместимым с системой Xive/Friadent – REF 0140 в составе:

- Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой с Xive/Friadent – REF 0193 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

146 Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Biomet 3i – REF 0181 с винтом M1,6 совместимым с системой Biomet 3i – REF 0137 в составе:

- Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Biomet 3i – REF 0181 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Biomet 3i – REF 0137 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

147 Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Biomet 3i – REF 0182 с винтом M1,6 совместимым с системой Biomet 3i – REF 0137 в составе:

- Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Biomet 3i – REF 0182 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Biomet 3i – REF 0137 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

148 Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Ankylos – REF 0278 с винтом M1,8 совместимым с системой Ankylos – REF 0248 в составе:

- Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Ankylos – REF 0278 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

149 Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Ankylos – REF 0415 с винтом M1,8 совместимым с системой Ankylos – REF 0248 в составе:

- Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Ankylos – REF 0415 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

150 Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Dentium – REF 0176 с винтом M2 совместимым с системой Dentium – REF 0249 в составе:

- Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Dentium – REF 0176 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Dentium – REF 0249 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

151 Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Astra Tech – REF 0174 с винтом M1,6 совместимым с системой Astra Tech – REF 0138 в составе:

- Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Astra Tech – REF 0174 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Astra Tech – REF 0138 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

152 Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Astra Tech – REF 0175 с винтом M2 совместимым с системой Astra Tech – REF 0139 в составе:

- Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Astra Tech – REF 0175 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Astra Tech – REF 0139 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

153 Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0172 с винтом M1,6 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0215 в составе:

- Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0172 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0215 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Подп. и дата

Изм. № ду

Взам. инв. №

Подп. и дата

в № подл.

32.50.22 ИП

Лист

79

154 Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0173 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0216 в составе:

- Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0173 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0216 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

155 Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Osstem – REF 0489 с винтом M1,6 совместимым с системой Osstem – REF 0431 в составе:

- Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Osstem – REF 0489 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Osstem – REF 0431 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

156 Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Osstem – REF 0491 с винтом M2 совместимым с системой Osstem – REF 0432 в составе:

- Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Osstem – REF 0491 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Osstem – REF 0432 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

157 Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0195 с винтом M1,6 совместимым с системой Straumann Bone Level – REF 0256 в составе:

- Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0195 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0256 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

158 Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0197 с винтом M1,6 совместимым с системой Straumann Bone Level – REF 0256 в составе:

- Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0197 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0256 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

159 Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0199 с винтом M2 совместимым с системой Straumann Synocta – REF 0255 в составе:

- Основание без фиксации (Sirona) совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0199 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Straumann Synocta – REF 0255 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

160 Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Astra Tech – REF 0162 с винтом M1,6 совместимым с системой Astra Tech – REF 0138 в составе:

- Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Astra Tech – REF 0162 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Astra Tech – REF 0138 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

161 Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Astra Tech – REF 0163 с винтом M2 совместимым с системой Astra Tech – REF 0139 в составе:

- Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Astra Tech – REF 0163 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Astra Tech – REF 0139 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

162 Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Dentium – REF 0270 с винтом M2 совместимым с системой Dentium – REF 0249 в составе:

- Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Dentium – REF 0270 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Dentium – REF 0249 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Подп. и дата

Изм. № до

Взам. инв. №

Подп. и дата

в. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

80

163 Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0164 с винтом M1,6 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0215 в составе:

- Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0164 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0215 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

164 Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0165 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0216 в составе:

- Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Nobel Conical Connection – REF 0165 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0216 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

164 Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Osstem – REF 0488 с винтом M1,6 совместимым с системой Osstem – REF 0431 в составе:

- Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Osstem – REF 0488 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Osstem – REF 0431 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

165 Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Osstem – REF 0490 с винтом M2 совместимым с системой Osstem – REF 0432 в составе:

- Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Osstem – REF 0490 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Osstem – REF 0432 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

166 Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Biomet 3i – REF 0169 с винтом M1,6 совместимым с системой Biomet 3i – REF 0137 в составе:

- Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Biomet 3i – REF 0169 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Biomet 3i – REF 0137 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

167 Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Biomet 3i – REF 0170 с винтом M1,6 совместимым с системой Biomet 3i – REF 0137 в составе:

- Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Biomet 3i – REF 0170 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Biomet 3i – REF 0137 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

168 Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Ankylos – REF 0277 с винтом M1,8 совместимым с системой Ankylos – REF 0248 в составе:

- Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Ankylos – REF 0277 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

169 Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Ankylos – REF 0414 с винтом M1,8 совместимым с системой Ankylos – REF 0248 в составе:

- Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Ankylos – REF 0414 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

170 Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0269 с винтом M1,8 совместимым с системой шестигранное соединение – REF 0134 в составе:

- Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0269 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0134 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Подп. и дата	
Инв. № ду	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
В. № подл.	

000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	Дата		

32.50.22 ИП

Лист

81

171 Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0161 с винтом M1,8 совместимым с системой шестигранное соединение – REF 0134 в составе:

- Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0161 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0134 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

172 Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0194 с винтом M1,6 совместимым с системой Straumann Bone Level – REF 0256 в составе:

- Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0194 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0256 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

173 Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0196 с винтом M1,6 совместимым с системой Straumann Bone Level – REF 0256 в составе:

- Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0196 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0256 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

174 Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Nobel Replace – REF 0264 с винтом M1,8 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0119 в составе:

- Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Nobel Replace – REF 0264 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0119 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

175 Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Nobel Replace – REF 0265 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0120 в составе:

- Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Nobel Replace – REF 0265 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0120 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

176 Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Nobel Replace – REF 0266 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0120 в составе:

- Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Nobel Replace – REF 0266 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0120 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

177 Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0198 с винтом M2 совместимым с системой Straumann Synocta – REF 0255 в составе:

- Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Straumann Synocta – REF 0198 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Straumann Synocta – REF 0255 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

178 Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0166 с винтом M1,6 совместимым с системой Xive/Friadent – REF 0140 в составе:

- Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0166 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

179 Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0167 с винтом M1,6 совместимым с системой Xive/Friadent – REF 0140 в составе:

- Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0167 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

В.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № д/у	Подп. и дата	32.50.22 ИП	Лист
						82
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU					Дата	

180 Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0168 с винтом M1,6 совместимым с системой Xive/Friadent – REF 0140 в составе:

- Основание с фиксацией (Sirona) совместимое с системой Xive/Friadent – REF 0168 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

181 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0008 с винтом M1,8 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0119 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0008 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0119 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

182 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0009 с винтом M1,8 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0119 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0009 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0119 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

183 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0010 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0120 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0010 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0120 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

184 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0011 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0120 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0011 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0120 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

185 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0012 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0120 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0012 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0120 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

186 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Biomet 3i – REF 0049 с винтом M1,6 совместимым с системой Biomet 3i – REF 0137 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Biomet 3i – REF 0049 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Biomet 3i – REF 0137 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

187 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Biomet 3i – REF 0050 с винтом M1,6 совместимым с системой Biomet 3i – REF 0137 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Biomet 3i – REF 0050 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Biomet 3i – REF 0137 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

188 Абатмент угловой 15° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0063 с винтом M1,8 совместимым с системой шестигранное соединение – REF 0134 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0063 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0134 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Подп. и дата

Изм. № ду

Взам. инв. №

Подп. и дата

в. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

83

189 Абатмент угловой 15° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0064 с винтом M1,8 совместимым с системой шестигранное соединение – REF 0134 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0064 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0134 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

190 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0077 с винтом M1,6 совместимым с системой Straumann Bone Level – REF 0256 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0077 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0256 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

191 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0078 с винтом M1,6 совместимым с системой Straumann Bone Level – REF 0256 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0078 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0256 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

192 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Straumann Synocta – REF 0086 с винтом M2 совместимым с системой Straumann Synocta – REF 0255 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Straumann Synocta – REF 0086 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Straumann Synocta – REF 0255 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

193 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Astra Tech – REF 0093 с винтом M1,6 совместимым с системой Astra Tech – REF 0138 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Astra Tech – REF 0093 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Astra Tech – REF 0138 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

194 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Astra Tech – REF 0094 с винтом M2 совместимым с системой Astra Tech – REF 0139 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Astra Tech – REF 0094 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Astra Tech – REF 0139 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

195 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0104 с винтом M1,6 совместимым с системой Xive/Friadent – REF 0140 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0104 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

196 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0105 с винтом M1,6 совместимым с системой Xive/Friadent – REF 0140 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0105 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

197 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0106 с винтом M1,6 совместимым с системой Xive/Friadent – REF 0140 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0106 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Подп. и дата	
Изм. № до	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
в № подл.	

32.50.22 ИП

Лист

84

198 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0133 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0120 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0133 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0120 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

199 Абатмент угловой 15° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0153 с винтом M1,8 совместимым с системой шестигранное соединение – REF 0134 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0153 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0134 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

200 Абатмент угловой 15° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0154 с винтом M1,8 совместимым с системой шестигранное соединение – REF 0134 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0154 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0134 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

201 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0211 с винтом M1,6 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0215 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0211 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0215 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

202 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0212 с винтом M1,6 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0215 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0212 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0215 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

203 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0213 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0216 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0213 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0216 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

204 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0214 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0216 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0214 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0216 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

205 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Dentium – REF 0221 с винтом M2 совместимым с системой Dentium – REF 0249 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Dentium – REF 0221 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Dentium – REF 0249 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

206 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Dentium – REF 0222 с винтом M2 совместимым с системой Dentium – REF 0249 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Dentium – REF 0222 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Dentium – REF 0249 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

в.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № ду	Подп. и дата	32.50.22 ИП	Лист
						85
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU						Дата

207 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Ankylos – REF 0237 с винтом M1,8 совместным с системой Ankylos – REF 0248 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Ankylos – REF 0237 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

208 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Ankylos – REF 0238 с винтом M1,8 совместным с системой Ankylos – REF 0248 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Ankylos – REF 0238 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

209 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Ankylos – REF 0239 с винтом M1,8 совместным с системой Ankylos – REF 0248 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Ankylos – REF 0239 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

210 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Ankylos – REF 0242 с винтом M1,8 совместным с системой Ankylos – REF 0248 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Ankylos – REF 0242 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

211 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Ankylos – REF 0243 с винтом M1,8 совместным с системой Ankylos – REF 0248 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Ankylos – REF 0243 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

212 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Ankylos – REF 0244 с винтом M1,8 совместным с системой Ankylos – REF 0248 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Ankylos – REF 0244 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

213 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Ankylos – REF 0245 с винтом M1,8 совместным с системой Ankylos – REF 0248 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Ankylos – REF 0245 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Ankylos – REF 0248 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

214 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Astra Tech – REF 0263 с винтом M1,6 совместным с системой Astra Tech – REF 0138 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Astra Tech – REF 0263 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Astra Tech – REF 0138 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

215 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Biomet 3i – REF 0281 с винтом M1,6 совместным с системой Biomet 3i – REF 0137 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Biomet 3i – REF 0281 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Biomet 3i – REF 0137 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

в.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № д/у	Подп. и дата	32.50.22 ИП	Лист
						86
ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU						Дата

216 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0282 с винтом M1,6 совместимым с системой Straumann Bone Level – REF 0256 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0282 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0256 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

217 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0302 с винтом M1,6 совместимым с системой Xive/Friadent – REF 0140 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0302 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

218 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0303 с винтом M1,6 совместимым с системой Xive/Friadent – REF 0140 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0303 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

219 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0304 с винтом M1,6 совместимым с системой Xive/Friadent – REF 0140 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0304 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

220 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0305 с винтом M1,6 совместимым с системой Xive/Friadent – REF 0140 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0305 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Xive/Friadent – REF 0140 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

221 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Mis C1 – REF 0310 с винтом M1,8 совместимым с системой Mis C1 – REF 0462 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Mis C1 – REF 0310 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Mis C1 – REF 0462 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

222 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Mis C1 – REF 0311 с винтом M1,8 совместимым с системой Mis C1 – REF 0462 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Mis C1 – REF 0311 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Mis C1 – REF 0462 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

223 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Mis C1 – REF 0312 с винтом M1,8 совместимым с системой Mis C1 – REF 0462 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Mis C1 – REF 0312 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Mis C1 – REF 0462 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

224 Абатмент угловой 15° совместимый с системой Mis C1 – REF 0313 с винтом M1,8 совместимым с системой Mis C1 – REF 0462 в составе:

- Абатмент угловой 15° совместимый с системой Mis C1 – REF 0313 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Mis C1 – REF 0462 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Подп. и дата	
Инв. № д/у	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
в. № подл.	

000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	Дата		

32.50.22 ИП

Лист

87

225 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0909 с винтом M1,6 совместимым с системой Osstem – REF 0931 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0909 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Osstem – REF 0931 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

226 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0909 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0909 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

227 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0909 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0909 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

228 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0909 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0909 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

229 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0910 с винтом M1,6 совместимым с системой Osstem – REF 0931 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0910 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Osstem – REF 0931 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

230 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0910 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0910 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

231 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0910 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0910 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

232 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0910 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0910 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

233 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0936 с винтом M2 совместимым с системой Osstem – REF 0942 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0936 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Osstem – REF 0942 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Подп. и дата				
Инв. № ЛУ				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
в. № подл.				
32.50.22 ИП				
Лист				
88				

234 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0936 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0936 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

235 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0936 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0936 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

236 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0936 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0936 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

237 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0937 с винтом M2 совместимым с системой Osstem – REF 0942 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0937 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Osstem – REF 0942 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

238 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0937 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0937 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

239 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0937 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0937 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

240 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0937 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Osstem – REF 0937 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

241 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Dentium – REF 0911 с винтом M2 совместимым с системой Dentium – REF 0930 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Dentium – REF 0911 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Dentium – REF 0930 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

242 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Dentium – REF 0911 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Dentium – REF 0911 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Подп. и дата	
Инв. № ду	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
в. № подл.	

000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	1.	Дата	

32.50.22 ИП

Лист

89

243 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Dentium – REF 0911 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Dentium – REF 0911 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

244 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Dentium – REF 0911 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Dentium – REF 0911 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

245 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Dentium – REF 0912 с винтом M2 совместимым с системой Dentium – REF 0930 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Dentium – REF 0912 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Dentium – REF 0930 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

246 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Dentium – REF 0912 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Dentium – REF 0912 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

247 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Dentium – REF 0912 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Dentium – REF 0912 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

248 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Dentium – REF 0912 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Dentium – REF 0912 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

249 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0324 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0929 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0324 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0929 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

250 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0324 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0324 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

251 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0324 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0324 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Подп. и дата	
Инв. № ду	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
в. № подл.	

32.50.22 ИП

Лист

90

252 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0324 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0324 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

253 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0325 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0929 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0325 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0929 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

254 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0325 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0325 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

255 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0325 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0325 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

256 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0325 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0325 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

257 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0334 с винтом M1,6 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0561 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0334 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0561 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

258 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0334 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0334 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

259 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0334 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0334 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

260 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0334 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0334 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Подп. и дата

Инв. № л/у

Взам. инв. №

Подп. и дата

в № подл.

32.50.22 ИП

Лист

91

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0339 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0339 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0339 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0348 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0504 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

шестигранное соединение – REF 0348 – 1 шт.

- Мультиюннит угловой 17° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0348 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюннита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0348 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0349 – 1 шт.
- Винт M1.8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0504 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0349 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0349 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0349 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0352 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0504 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0352 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0352 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0352 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0353 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0504 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0353 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0353 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

[illegible]

288 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0353 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0353 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

289 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0362 с винтом M1,6 совместимым с системой Astra Tech – REF 0811 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0362 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Astra Tech – REF 0811 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

290 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0362 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0362 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

291 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0362 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0362 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

292 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0362 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0362 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

293 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0363 с винтом M1,6 совместимым с системой Astra Tech – REF 0811 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0363 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Astra Tech – REF 0811 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

294 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0363 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0363 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

295 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0363 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0363 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

296 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0363 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0363 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Подп. и дата

Изм. № ду

Взам. инв. №

Подп. и дата

в. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

95

297 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0366 с винтом M2 совместимым с системой Astra Tech – REF 0812 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0366 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Astra Tech – REF 0812 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

298 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0366 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0366 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

299 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0366 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0366 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

300 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0366 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0366 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

301 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0367 с винтом M2 совместимым с системой Astra Tech – REF 0812 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0367 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Astra Tech – REF 0812 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

302 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0367 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0367 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

303 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0367 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0367 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

304 Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0367 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 17° совместимый с системой Astra Tech – REF 0367 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

305 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0326 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0929 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0326 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0929 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Подп. и дата

Инт. № д/у

Взам. инв. №

Подп. и дата

В.№ подл.

32.50.22 ИП

Лист

96

306 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0326 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0326 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

307 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0326 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0326 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

308 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0326 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0326 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

309 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0327 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0929 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0327 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0929 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

310 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0327 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0327 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

311 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0327 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0327 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

312 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0327 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Replace – REF 0327 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

313 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0336 с винтом M1,6 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0561 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0336 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0561 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

314 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0336 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0336 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Подп. и дата	
Инв. № д	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
№ подл.	

32.50.22 ИП

Лист

97

315 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0336 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0336 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

316 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0336 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0336 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

317 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0337 с винтом M1,6 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0561 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0337 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0561 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

318 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0337 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0337 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

319 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0337 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0337 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

320 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0337 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0337 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

321 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0340 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0560 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0340 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0560 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

322 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0340 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0340 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

323 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0340 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0340 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Подп. и дата

Инв. № ЛУ

Взам. инв. №

Подп. и дата

в. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

98

324 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0340 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0340 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

325 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0341 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0560 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0341 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0560 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

326 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0341 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0341 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

327 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0341 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0341 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

328 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0341 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0341 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

329 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединение – REF 0350 с винтом M1,8 совместимым с системой шестигранные соединение – REF 0504 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединение – REF 0350 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранные соединение – REF 0504 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

330 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединение – REF 0350 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединение – REF 0350 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

331 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединение – REF 0350 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединение – REF 0350 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

332 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединение – REF 0350 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединение – REF 0350 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Подп. и дата

Изм. № ду

Взам. инв. №

Подп. и дата

№ подл.

32.50.22 ИП

Лист

99

- Мультишпигонит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединение – REF 0351 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранные соединение – REF 0504 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединения – REF 0351 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединения – REF 0351 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединения – REF 0351 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиинионит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединения – REF 0354 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранные соединения – REF 0504 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединения – REF 0354 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединения – REF 0354 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультификсатор угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединения – REF 0354 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультификсатора – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультииниит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединения – REF 0355 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранные соединения – REF 0504 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

342 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединение – REF 0355 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединение – REF 0355 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

343 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединение – REF 0355 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединение – REF 0355 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

344 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединение – REF 0355 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой шестигранные соединение – REF 0355 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

345 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0364 с винтом M1,6 совместимым с системой Astra Tech – REF 0811 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0364 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Astra Tech – REF 0811 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

346 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0364 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0364 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

347 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0364 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0364 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

348 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0364 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0364 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

349 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0365 с винтом M1,6 совместимым с системой Astra Tech – REF 0811 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0365 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Astra Tech – REF 0811 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

350 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0365 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0365 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Подп. и дата

Инт. № ду

Взам. инв. №

Подп. и дата

В.№ подл.

32.50.22 ИП

Лист

101

- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

351 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0365 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0365 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

352 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0365 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0365 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

353 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0368 с винтом M2 совместимым с системой Astra Tech – REF 0812 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0368 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Astra Tech – REF 0812 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

354 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0368 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0368 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

355 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0368 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0368 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

356 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0368 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0368 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

357 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0369 с винтом M2 совместимым с системой Astra Tech – REF 0812 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0369 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Astra Tech – REF 0812 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

358 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0369 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0369 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

359 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0369 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0369 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Подп. и дата	
Инт. № ду	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
В. № подл.	

32.50.22 ИП

Лист

102

- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

360 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0369 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Astra Tech – REF 0369 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

361 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Dentium – REF 0913 с винтом M2 совместимым с системой Dentium – REF 0930 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Dentium – REF 0913 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Dentium – REF 0930 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

362 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Dentium – REF 0913 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Dentium – REF 0913 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

363 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Dentium – REF 0913 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Dentium – REF 0913 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

364 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Dentium – REF 0913 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Dentium – REF 0913 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

365 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Dentium – REF 0914 с винтом M2 совместимым с системой Dentium – REF 0930 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Dentium – REF 0914 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Dentium – REF 0930 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

366 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Dentium – REF 0914 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Dentium – REF 0914 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

367 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Dentium – REF 0914 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Dentium – REF 0914 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

368 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Dentium – REF 0914 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Dentium – REF 0914 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Подп. и дата

Имя, № д/у

Взам. инв. №

Подп. и дата

№ подл.

32.50.22 ИП

Лист

103

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ина. № д/у	Подп. и дата

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0915 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Osstem – REF 0931 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0915 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0915 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0915 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультигюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0916 – 1 шт.
- Винт M1.6 совместимый с системой Osstem – REF 0931 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиинит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0916 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиинита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультионит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0916 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультионита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0916 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиконтит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0938 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Osstem – REF 0942 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

378 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0938 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0938 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

379 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0938 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0938 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

380 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0938 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0938 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

381 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0939 с винтом M2 совместимым с системой Osstem – REF 0942 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0939 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Osstem – REF 0942 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

382 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0939 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0939 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

383 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0939 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0939 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

384 Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0939 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 30° совместимый с системой Osstem – REF 0939 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

385 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0917 с винтом M1,6 совместимым с системой Osstem – REF 0931 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0917 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Osstem – REF 0931 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

386 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0917 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0917 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Подп. и дата

Инт. № ду

Взам. инв. №

Подп. и дата

в. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

105

- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

387 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0917 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0917 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

388 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0917 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0917 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

389 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0935 с винтом M1,6 совместимым с системой Osstem – REF 0931 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0935 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Osstem – REF 0931 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

390 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0935 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0935 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

391 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0935 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0935 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

392 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0935 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0935 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

393 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0940 с винтом M2 совместимым с системой Osstem – REF 0942 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0940 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Osstem – REF 0942 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

394 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0940 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0940 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

395 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0940 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0940 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Подп. и дата

Инт. № д/с

Взам. инв. №

Подп. и дата

в. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

106

- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

396 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0940 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0940 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

397 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0941 с винтом M2 совместимым с системой Osstem – REF 0942 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0941 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Osstem – REF 0942 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

398 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0941 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0941 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

399 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0941 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0941 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

400 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0941 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Osstem – REF 0941 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

401 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Dentium – REF 0918 с винтом M2 совместимым с системой Dentium – REF 0930 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Dentium – REF 0918 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Dentium – REF 0930 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

402 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Dentium – REF 0918 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Dentium – REF 0918 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

403 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Dentium – REF 0918 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Dentium – REF 0918 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

404 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Dentium – REF 0918 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Dentium – REF 0918 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Подп. и дата

Инд. № ду

Взам. инв. №

Подп. и дата

№ подл.

32.50.22 ИП

Лист

107

в.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № д/с	Подп. и дата

в. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № ду	Подп. и дата

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0932 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0932 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0932 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиинит угловой 45° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0933 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0561 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0933 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0933 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0933 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультинонит угловой 45° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0920 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0560 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0920 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

в. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № ду	Подп. и дата

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0920 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0920 – 1 шт.
- Винт M1.4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиконит угловой 45° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0947 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0504 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой шестигранное соединение - REF 0947 - 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита - REF 0374-01 - 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.
- Индивидуальная упаковка - 1 шт.

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0947 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0947 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиконтит угловой 45° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0948 – 1 шт.
- Винт M1.8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0504 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0948 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0948 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Подп. и дата

MoB. No 17

ВЗАМ. ИЧВ. №

Подп. и дата

В. № подл.

B. № 170

000 |

1

- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

441 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0943 с винтом M1,6 совместимым с системой Astra Tech – REF 0811 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0943 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Astra Tech – REF 0811 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

442 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0943 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0943 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

443 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0943 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0943 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

444 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0943 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0943 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

445 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0944 с винтом M1,6 совместимым с системой Astra Tech – REF 0811 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0944 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Astra Tech – REF 0811 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

446 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0944 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0944 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

447 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0944 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0944 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

448 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0944 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0944 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

449 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0945 с винтом M2 совместимым с системой Astra Tech – REF 0812 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0945 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Astra Tech – REF 0812 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

в. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № ду	Подп. и дата	32.50.22 ИП	Лист
						112
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU						Дата

- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

450 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0945 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0945 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

451 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0945 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0945 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

452 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0945 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0945 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

453 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0946 с винтом M2 совместимым с системой Astra Tech – REF 0812 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0946 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Astra Tech – REF 0812 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

454 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0946 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0946 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-01 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

455 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0946 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0946 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-02 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

456 Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0946 с винтом M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 в составе:

- Мультиюнит угловой 45° совместимый с системой Astra Tech – REF 0946 – 1 шт.
- Винт M1,4 для мультиюнита – REF 0374-03 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

457 Основание удлиненное с фиксацией совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0283 с винтом M1,6 совместимым с системой Straumann Bone Level – REF 0256 в составе:

- Основание удлиненное с фиксацией совместимое с системой Straumann Bone Level – REF 0283 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Straumann Bone Level – REF 0256 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

458 Основание удлиненное с фиксацией совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0285 с винтом M1,8 совместимым с системой шестигранное соединение – REF 0134 в составе:

- Основание удлиненное с фиксацией совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0285 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0134 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

В.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № ду	Подп. и дата	32.50.22 ИП	Лист
						113
ООО ЦИРМИ					Дата	

- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

459 Основание удлиненное с фиксацией совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0287 с винтом M1,8 совместимым с системой шестигранное соединение – REF 0134 в составе:

- Основание удлиненное с фиксацией совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0287
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0134 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

460 Основание удлиненное с фиксацией совместимое с Nobel Replace – REF 0289 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0120 в составе:

- Основание удлиненное с фиксацией совместимое с Nobel Replace – REF 0289 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0120 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

461 Основание удлиненное с фиксацией совместимое с системой Nobel Replace – REF 0846 с винтом M1,8 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0119 в составе:

- Основание удлиненное с фиксацией совместимое с системой Nobel Replace – REF 0846 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0119 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

462 Основание удлиненное без фиксации шестигранное соединение – REF 0286 с винтом M1,8 совместимым с системой шестигранное соединение – REF 0134 в составе:

- Основание удлиненное без фиксации шестигранное соединение – REF 0286 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0134 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

463 Основание удлиненное без фиксации совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0288 с винтом M1,8 совместимым с системой шестигранное соединение – REF 0134 в составе:

- Основание удлиненное без фиксации совместимое с системой шестигранное соединение – REF 0288 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой шестигранное соединение – REF 0134 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

464 Основание удлиненное без фиксации совместимое с системой Nobel Replace – REF 0492 с винтом M1,8 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0119 в составе:

- Основание удлиненное без фиксации совместимое с системой Nobel Replace – REF – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0119 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

465 Основание удлиненное без фиксации совместимое с системой Nobel Replace – REF 0290 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0120 в составе:

- Основание удлиненное без фиксации совместимое с системой Nobel Replace – REF 0290 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0120 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

466 Основание удлиненное без фиксации совместимое с системой Nobel Replace – REF 0493 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0120 в составе:

- Основание удлиненное без фиксации совместимое с системой Nobel Replace – REF 0493 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0120 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

467 Основание для одиночных конструкций совместимое с системой Nobel Conical Connection ND – REF 0416 с винтом M1,6 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0813 в составе:

- Основание для одиночных конструкций совместимое с системой Nobel Conical Connection ND – REF 0416 – 1 шт.
- Винт M1,6 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0813 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Подп. и дата

Инт. № ду

Взам. инв. №

Подп. и дата

в. № подл.

32.50.22 ИП

Лист

114

- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

468 Основание для одиночных конструкций совместимое с системой Nobel Conical Connection ND – REF 0487 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0814 в составе:

- Основание для одиночных конструкций совместимое с системой Nobel Conical Connection ND – REF 0487 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0814 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

469 Основание для одиночных конструкций совместимое с системой Nobel Replace – REF 0024 с винтом M1,8 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0122 в составе:

- Основание для одиночных конструкций совместимое с системой Nobel Replace – REF 0024 – 1 шт.
- Винт M1,8 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0122 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

470 Основание для одиночных конструкций совместимое с системой Nobel Replace – REF 0025 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0123 в составе:

- Основание для одиночных конструкций совместимое с системой Nobel Replace – REF 0025 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0123 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

471 Основание для одиночных конструкций совместимое с системой Nobel Replace – REF 0026 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Replace – REF 0123 в составе:

- Основание для одиночных конструкций совместимое с системой Nobel Replace – REF 0026 – 1 шт.
- Винт M2 совместимый с системой Nobel Replace – REF 0123 – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

4 Техническому обслуживанию и ремонту изделия не подлежат

5 Сведения о применяемых производителем (изготовителем) медицинского изделия национальных стандартов

Обозначение	Наименование
ГОСТ 20790-93	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
МУ 287-113-98	Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы.
МУ 25.1-001-86	Методические указания. Устойчивость изделий медицинской техники к воздействию агрессивных биологических жидкостей. Методы испытаний
ГОСТ 19807-91	Титан и сплавы титановые деформируемые
ГОСТ 2789-73	Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики
СанПиН 2.1.3684-21	"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

32.50.22 ИП

Лист

115

ГОСТ 25250-88	Пленка поливинилхлоридная для изготовления тары под пищевые продукты и лекарственные средства. Технические условия
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ ISO 10993-1-2021	«Изделия медицинские. Оценка биологического воздействия медицинских изделий»: часть 1 «Оценка и исследование»,
ГОСТ ISO 10993-5-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro
ГОСТ ISO 10993-10-2011	«Изделия медицинские. Оценка биологического воздействия медицинских изделий»: часть 10 «Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия»,
ГОСТ ISO 10993-11-2021	«Изделия медицинские. Оценка биологического воздействия медицинских изделий»: часть 11 «Исследования общетоксического действия»,
ГОСТ Р 52770-2016	«Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»,
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1 Основные требования

И	№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
И	№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

И	№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
И	№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

32.50.22 ИП

Лист

116

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 116 лист(ов)



Руководитель организации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ ПРОТЕТИЧЕСКОГО

(Краткая)



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

"ООО Цирми"

О.Н.Савельев

22 января 2024г.

ИЗДЕЛИЯ ПРОТЕТИЧЕСКИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ «УЛЬТРАСТОМ» по ТУ 32.50.22– 002 – 94681064 – 2020

Вариант исполнения:

**Абатмент прямой стандартный, совместимый с системой Nobel Conical Connection – REF 0210 с винтом M2 совместимым с системой Nobel Conical Connection – REF 0216
НЕСТЕРИЛЬНО**

РУ № _____ от _____

Назначение: «Изделия протетические для систем дентальной имплантации «УЛЬТРАСТОМ» предназначены для использования во время реставрационных и зуботехнических работ с дентальным имплантатом с целью обеспечения постоянного промежуточного уровня между дентальным имплантатом и окончательным протезом/реставрацией (мостом, одним зубом, покрывным протезом). Прилагаются винты для абатмента.

Показания к применению: для восстановления жевательной эффективности при одиночных дефектах зубного ряда, включенных дефектах зубного ряда, концевых дефектах зубного ряда и полной адентии.

Противопоказания:

- сахарный диабет;
- хронические заболевания в стадии декомпенсации;
- нарушение коагуляции и гемостаза;
- ВИЧ;
- психические заболевания;
- острые воспалительные заболевания;
- аллергические реакции на препараты, применяемые при дентальной имплантации;
- лечение препаратами, ухудшающими регенерацию тканей (гормональная и химиотерапия, прием иммунодепрессантов)

Побочные действия:

- временное нарушение речи;
- воспалительные процессы слизистой оболочки полости рта, связанные с токсическим или травматическим действием протеза (пролежни, гингивиты, стоматиты);
- аллергические реакции на материалы, из которых изготовлены изделия протетические;

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 2а по ГОСТ 31508-2012.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделий протетических требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями и эксплуатационной документацией

Гарантийный срок эксплуатации изделий протетических- 12 месяцев с дня ввода в эксплуатацию, (установки изделия);

Гарантийный срок хранения до установки изделия – 1 год;

Потенциальный потребитель – врач – ортопед, прошедший специальную подготовку по эстетическому восстановлению всех групп зубов, профессиональной гигиены полости рта, протезированию несъемному на имплантатах

Сведения об утилизации.

Пришедшие в негодность изделия утилизируют в установленном порядке как отходы класса А в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

Детали, имеющие контакт с телом пациента, стерилизуются и утилизируются как отходы класса Б.

Сведения о техническом обслуживании и ремонте изделий протетических

Изделия протетические являются неремонтопригодными медицинскими изделиями.

Техническое обслуживание и ремонт изделий протетических не производится.

Подготовка к использованию

После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия протетические в транспортной упаковке должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не менее 12 ч.

Так как изделия протетические нестерильны, то их необходимо перед размещением в ротовой полости простерилизовать в соответствии с МУ 287-113

Изделия протетические в соответствии с МУ-287-113 устойчивы к следующему циклу обработки проводимой в клинике:

- предварительная очистка:

а) без разведения Сайдекс время обработки 15 минут или

- дезинфекция:

а) без разведения Сайдекс время обработки от 15 мин. до 90 мин. в зависимости от вида инфекции

б) без разведения Гротанат Борербад, время обработки 30 мин.

в) без разведения ИД220, время обработки 30 мин. МУ 287-113. Таб. 2.2

- **предстерилизационная очистка:** а) 0,5% Биолот; б) 1% Велтолен; в) 0,15% Септабик; г) 0,2% Септодор МУ 287-113. Таблица 3.1

- **стерилизация** - в автоклавах водяным насыщенным паром под избыточным давлением.

Режимы стерилизации:

1,1 атм., $t=120^{\circ}\text{C}$, 45 мин.

Изделия стерилизуют упакованными в стерилизационные упаковочные материалы, а также используют стерилизационные коробки без фильтров и с фильтрами. Упаковочные материалы должны иметь разрешения для использования их на территории РФ

Далее изделия протетические используются в соответствии с технологическим процессом хирургического и ортопедического лечения, который включает в себя этапы:

- разработка плана комплексного ортопедического лечения;

- индивидуальный подход к комплексному лечению;

- преемственность и согласованность хирургического и ортопедического этапов лечения.

Маркировка изделий в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023



Номер по каталогу



Не допускать воздействия влаги



Хрупкое, обращаться осторожно



Осторожно

Условия хранения и транспортирования - по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$

Срок хранения 1 год.

Изготовитель: ООО «Ультра»

Юр. адрес 192148, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Невская застава, пр-кт Елизарова, д. 34 литера А, помещ. 1-Н, офис 406

Тел. +7 (800) 333 53 09

Подробная информация о применении изделий протетических находится на сайте предприятия изготовителя <http://ultrastom.com>

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 лист(ов)

Руководитель организации

