

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

Радюшкин И.В.

«20» 03 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия

(ООО «БиоХолд»)

Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1




Реагент для
серологической
идентификации
Escherichia coli
в реакции
агглютинации
«Сыворотка
эшерихиозная
поливалентная
сухая- РА»
ОКС

ТУ 21.20.23-011-96299156-2022

Развести в 1,0 мл
раствора 0,9% NaCl



1 ампула

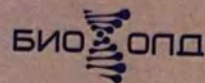

Реагент для
серологической
идентификации
Escherichia coli
в реакции
агглютинации
«Сыворотка
эшерихиозная
поливалентная
сухая- РА»
ОКЕ

ТУ 21.20.23-011-96299156-2022

Развести в 1,0 мл
раствора 0,9% NaCl



1 ампула



Реагент для
серологической
идентификации
Escherichia coli
в реакции
агглютинации
«Сыворотка
эшерихиозная
поливалентная
сухая- РА»
ОКА

ТУ 21.20.23-011-96299156-2022

Развести в 1,0 мл
раствора 0,9% NaCl



1 ампула



Реагент для
серологической
идентификации
Escherichia coli
в реакции
агглютинации
«Сыворотка
эшерихиозная
поливалентная
сухая- РА»
ОКД

ТУ 21.20.23-011-96299156-2022

Развести в 1,0 мл
раствора 0,9% NaCl



1 ампула



Реагент для
серологической
идентификации
Escherichia coli
в реакции
агглютинации
«Сыворотка
эшерихиозная
поливалентная
сухая- РА»
ОКВ

ТУ 21.20.23-011-96299156-2022

Развести в 1,0 мл
раствора 0,9% NaCl



1 ампула

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА,
ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52;
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства:
ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область,
г. Королёв, ул. Пионерская,
д. 4, к. 203

Состав:

Сыворотка поливалентная
сухая-РА ОКВ
(кат. № E. coli-PA-104)
1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.

РУ №

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА,
ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52;
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства:
ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область,
г. Королёв, ул. Пионерская,
д. 4, к. 203

Состав:

Сыворотка поливалентная
сухая-РА ОКА
(кат. № E. coli-PA-103)
1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.

РУ №

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА,
ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52;
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства:
ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область,
г. Королёв, ул. Пионерская,
д. 4, к. 203

Состав:

Сыворотка поливалентная
сухая-РА ОКС
(кат. № E. coli-PA-105)
1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.

РУ №

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА,
ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52;
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства:
ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область,
г. Королёв, ул. Пионерская,
д. 4, к. 203

Состав:

Сыворотка поливалентная
сухая-РА ОКД
(кат. № E. coli-PA-106)
1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.

РУ №

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА,
ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52;
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства:
ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область,
г. Королёв, ул. Пионерская,
д. 4, к. 203

Состав:

Сыворотка поливалентная
сухая-РА ОKE
(кат. № E. coli-PA-107)
1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.


Паспорт качества.

РУ №




141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Дата изготовления

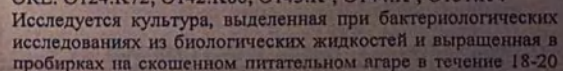Слѣдующіе изъ нихъ



Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20

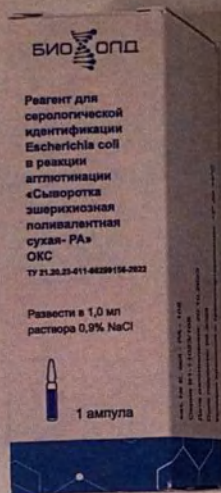

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая-РА
по ТУ 21.20.23-011-96299156-2022

ОКС

Каталожный номер кат. № E. coli – PA - 105
РУ № _____

Серия В1- 10716/105

Дата изготовления _____

Наименован
1.Внешний вид
Сыворотка поливалентная сух
2.Технические ха
Растворимость
Сыворотки поливалентной су
более , мин
Показатель опти
Сыворотки поливалентной су
разведении в 1,0
при длине волны 5
диапазоне, не мене
Микробиологическ
Сыворотки эшерих



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая-РА»
по ТУ 21.20.23-011-96299156-2022

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая предназначена для выявления следующих антигенов:


ОКА: O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-;"408"; ОКВ: O20:K84; O26:K60; O55:K59; O111:K58; ОКС: O86:K61; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O119:K69; O33:K-;

ОКД: O18:K77; O25:K11; O44:K74; O75:K95; O114:K90; O142:K86; O143:K-; O151:K-;"408";

ОКЕ: O124:K72; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20

Результаты
контроля

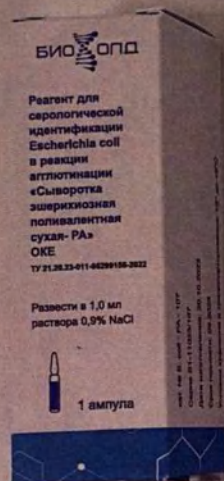

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая-РА
по ТУ 21.20.23-011-96299156-2022

ОКЕ

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 107
РУ №

Серия В1- 10716/107

Дата изготовления

Наименование
1. Внешний вид
Сыворотка поливалентная сухая
2. Технические характеристики
Растворимость Сыворотки поливалентной сухой, мин
Показатель оптической плотности Сыворотки поливалентной сухой в разведении в 1,0 мл при длине волны 540 нм, не менее
Микробиологическая чистота



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая-РА»
по ТУ 21.20.23-011-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O- и K-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая предназначена для выявления следующих антигенов:

ОКА: O18:K77; O20:K84; O25:K11; O26:K60; O33:K-; O44:K74; O55:K59; O75:K95; O86:K61; O111:K58; O114:K90; O119:K69; O124:K72; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-; "408"; ОКВ: O20:K84; O26:K60; O55:K59; O111:K58; ОКС: O86:K61; O125:K70; O126:K71; O127:K63; O128:K67; O119:K69; O33:K-; ОКД: O18:K77; O25:K11; O44:K74; O75:K95; O114:K90; O142:K86; O143:K-; O151:K-; "408"; ОКЕ: O124:K72; O142:K86; O143:K-; O144:K-; O151:K-.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20

Результаты контроля

Прошито, пронумеровано
(8 лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор ООО
«БиоХолд»



И.В. Радюшкин

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

Радюшкин И.В.
«20» 03 2024 г.

**ПРОЕКТ МАКЕТА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая–РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия

(ООО «БиоХолд»)

Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
ОКА

Кат. № E.coli – РА – 103

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения _____

условия транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая – РА ОКА (кат. № E. coli – РА - 104)

1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
ОКВ

Кат. № E.coli – РА – 104

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения _____

условия транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая – РА ОКВ(кат. № E. coli – РА - 105)

1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая – РА» по
ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
ОКС

Кат. № E.coli – РА – 105

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения _____

условия транспортирования _____

срок годности _____


Состав:

Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая – РА ОКС (кат. № E. coli – РА - 106)

1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.

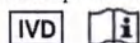

Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
ОКД

Кат. № E.coli – РА – 106

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения _____

условия транспортирования _____

срок годности _____


Состав:

Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая – РА ОКД (кат. № E. coli – РА - 107)

1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.

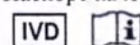

Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
ОКЕ

Кат. № E.coli – РА – 107

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения _____

условия транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая – РА ОКЕ (кат. № E. coli – РА - 108)

1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

Примечание, прилагаемое к документу
(4 лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор ООО
«БиоХолд»



И.В. Радюшкин

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»


Радюшкин И.В.

«20» 03 2024 г.

**РАЗВЕРТКА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli*
в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая–РА»
по ТУ 21.20.23-011-96299156-2022**


производитель:


Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия


(ООО «БиоХолд»)


Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

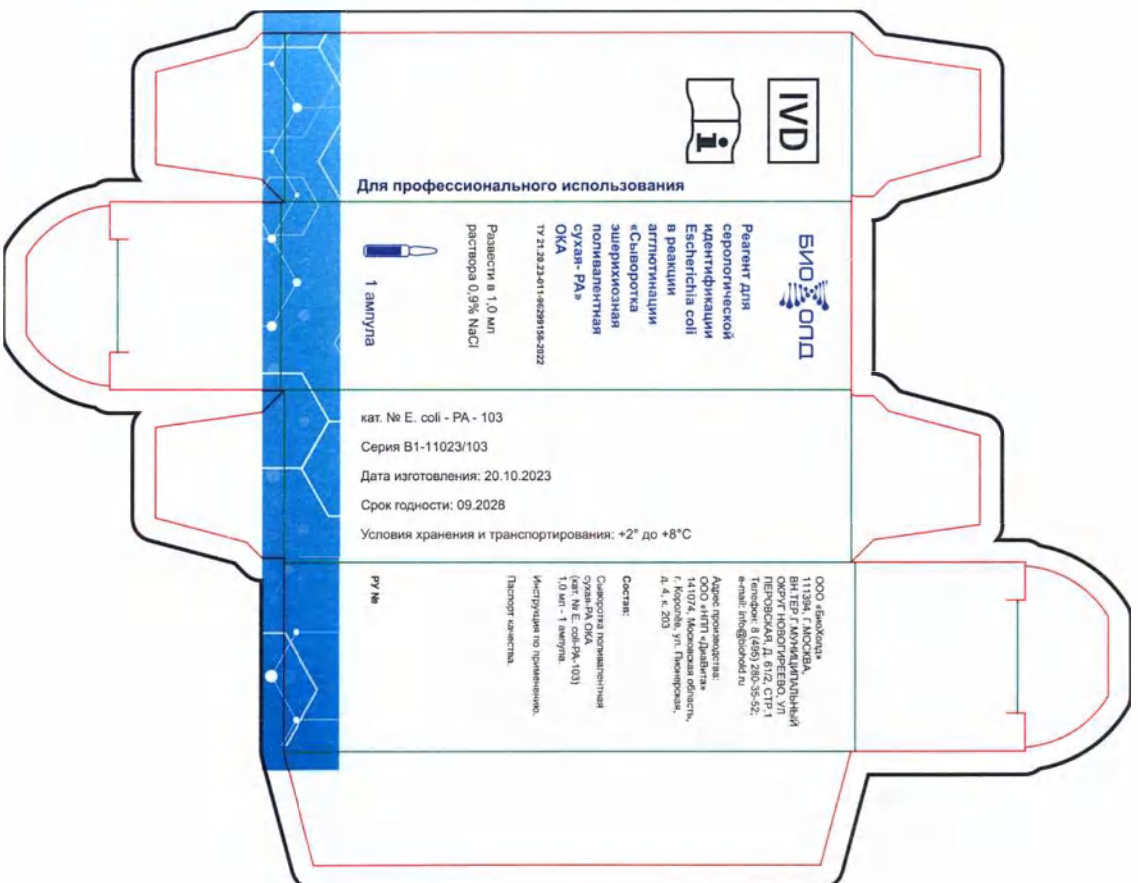

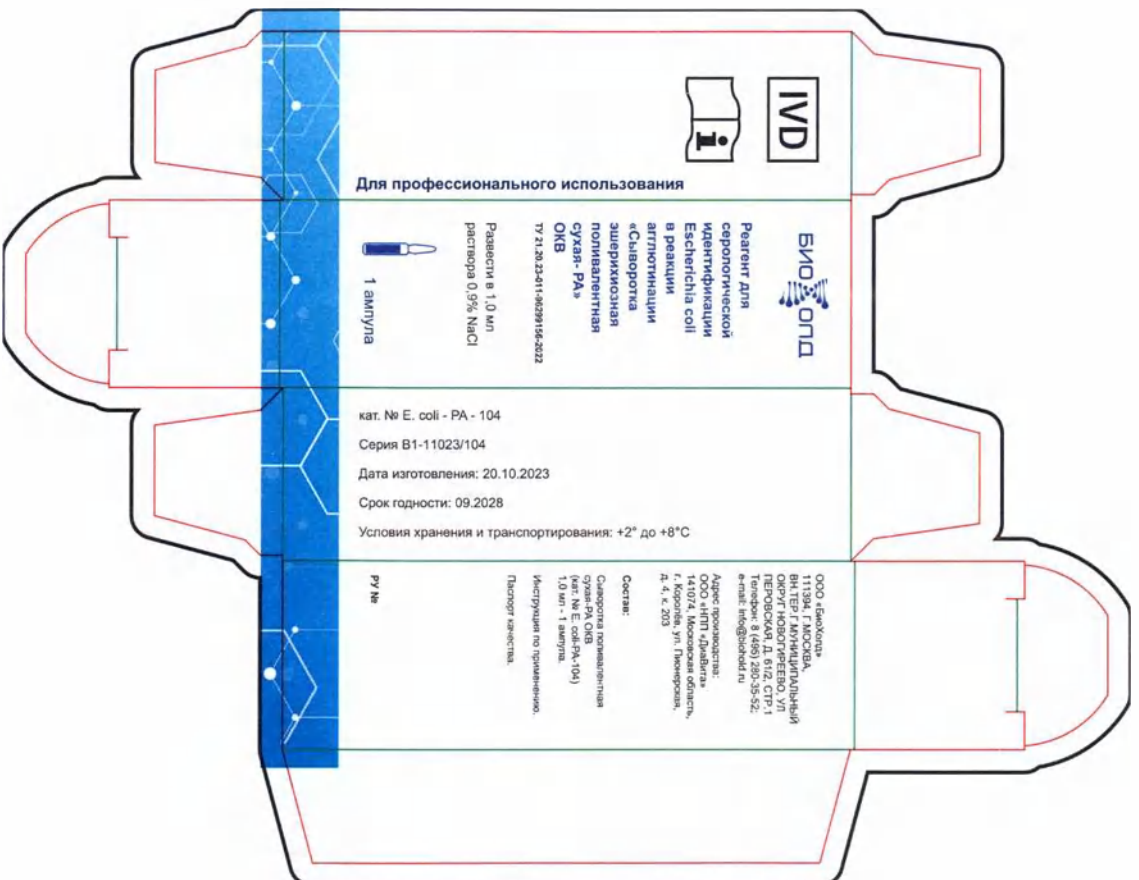

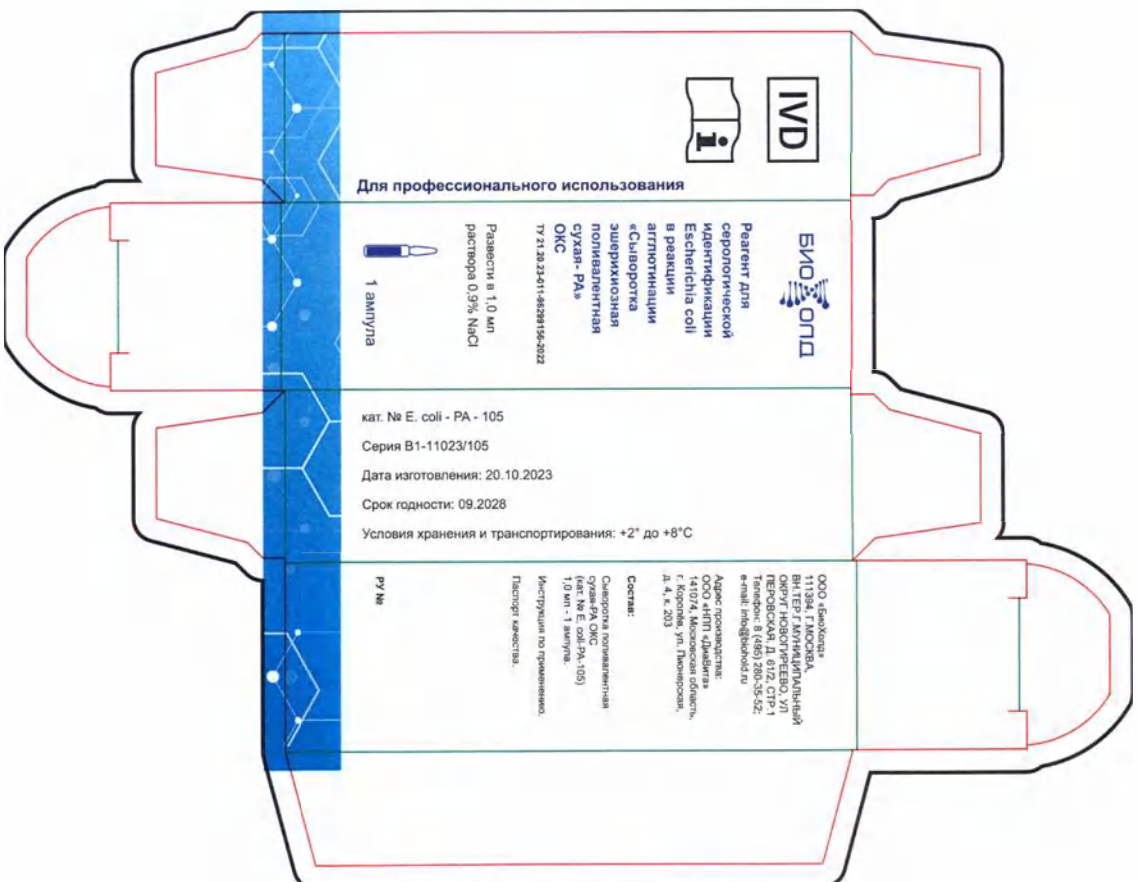

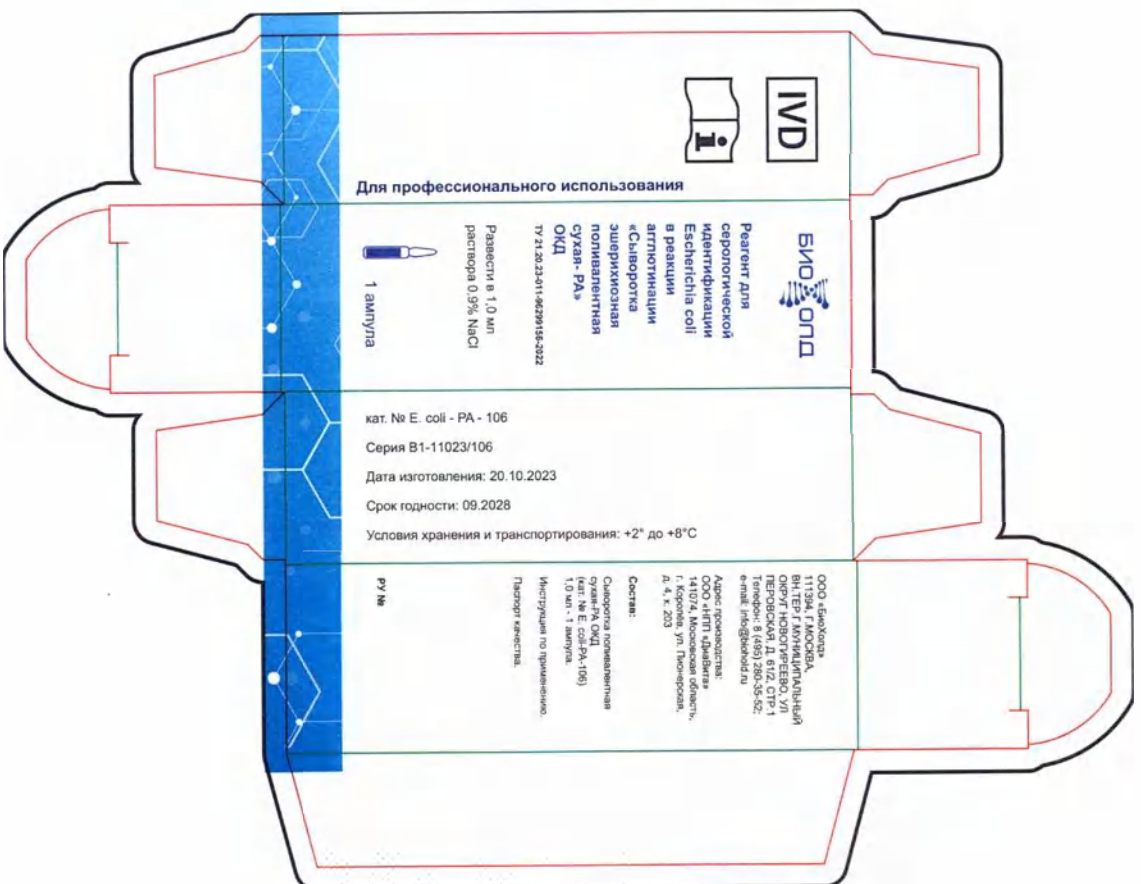

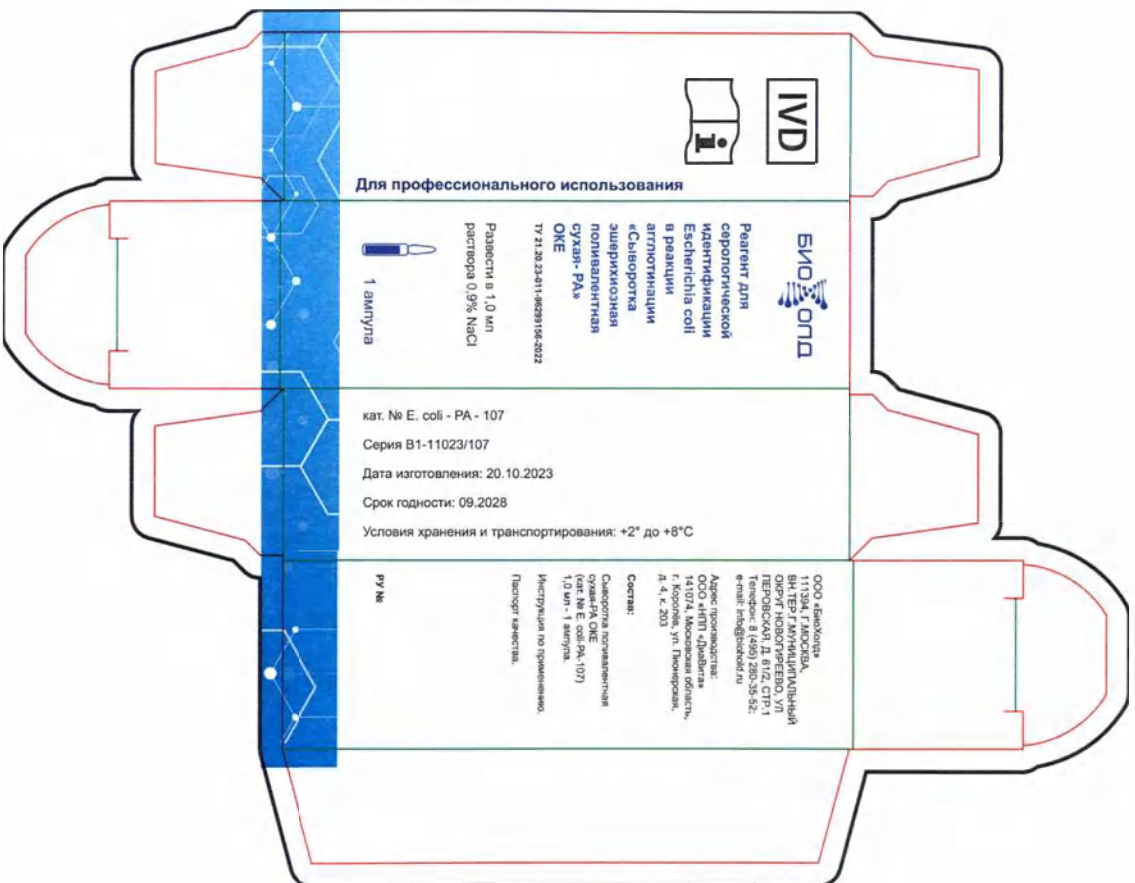

Прошито, пронумеровано
(6 лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор ООО
«БиоХолд»



И.В. Радюшкин

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «БиоХолд»



Радюшкин И.В.

2024 г.

**ПРОЕКТ МАКЕТА ЭТИКЕТКИ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции
агглютинации**

**«Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая – РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия

(ООО «БиоХолд»)

Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

Проект макета этикетки транспортной упаковки
Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая-РА»

ООО «БиоХолд»
111394, г.МОСКВА, ВН.ТЕР.г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая-РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

ОКА

Кат. № E.coli – РА -103

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, г.МОСКВА, ВН.ТЕР.г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая-РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

ОКВ

Кат. № E.coli – РА -104

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

Проект макета этикетки транспортной упаковки
Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая-РА»

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая-РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299158-2022
ОКС


Кат. № E.coli – РА -105
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____

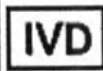

Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая-РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299158-2022
ОКД


Кат. № E.coli – РА -106
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____

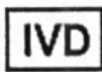

Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

Проект макета этикетки транспортной упаковки
Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая-РА»

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная поливалентная сухая-РА»
по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
ОКЕ

Кат. № *E.coli* – РА -107
серия № _____
срок годности _____ дата изготовления _____
количество комплектов _____
масса нетто 1-го комплекта _____
масса нетто _____ масса брутто _____

Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

Прошито, пронумеровано
(4 лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

И.В. Радюшкин

