

Euroclinic Viale dell'artigianato, 305/319 48014 Castelbolognese ITALIA	User Manual Release N° 01 Dtd 07/05/2003	ROLFMED OTO P/I 8/12
---	---	---

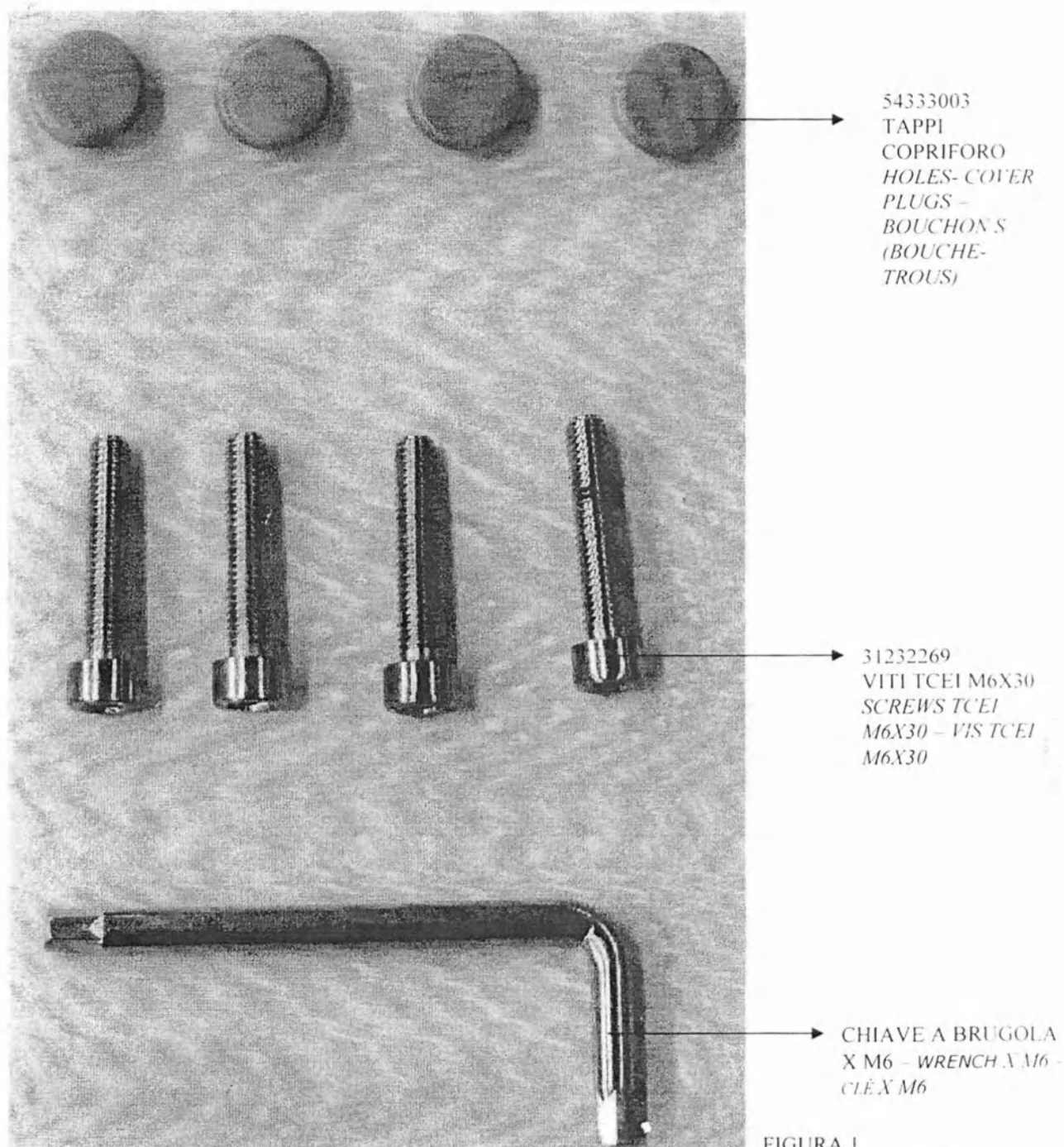


FIGURA 1
- PICTURE 1 - PHOTO 1

- ❑ **KIT MONTAGGIO SCHIENALE PODOPEG IN DOTAZIONE (FIGURA 1) – KIT FOR PODOPEG BACKREST ASSEMBLY TO EQUIP (PICTURE 1) – KIT POUR ASSEMBLAGE DU DOSSIER PODOPEG EN DOTATION (PHOTO 1)**

Euroclinic

Viale dell'artigianato,
305/319
48014 Castelbolognese
ITALIA

User Manual
Release N° 01
Dtd 07/05/2003

ROLFMED
OTO P/I 9/12

MARCA DA BOLLO

€ 14,62

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

000100402 00001402 40330001
00005982 19/03/2007 16:00:02
0001-00009 F990855318781

01.05.254413.670.8

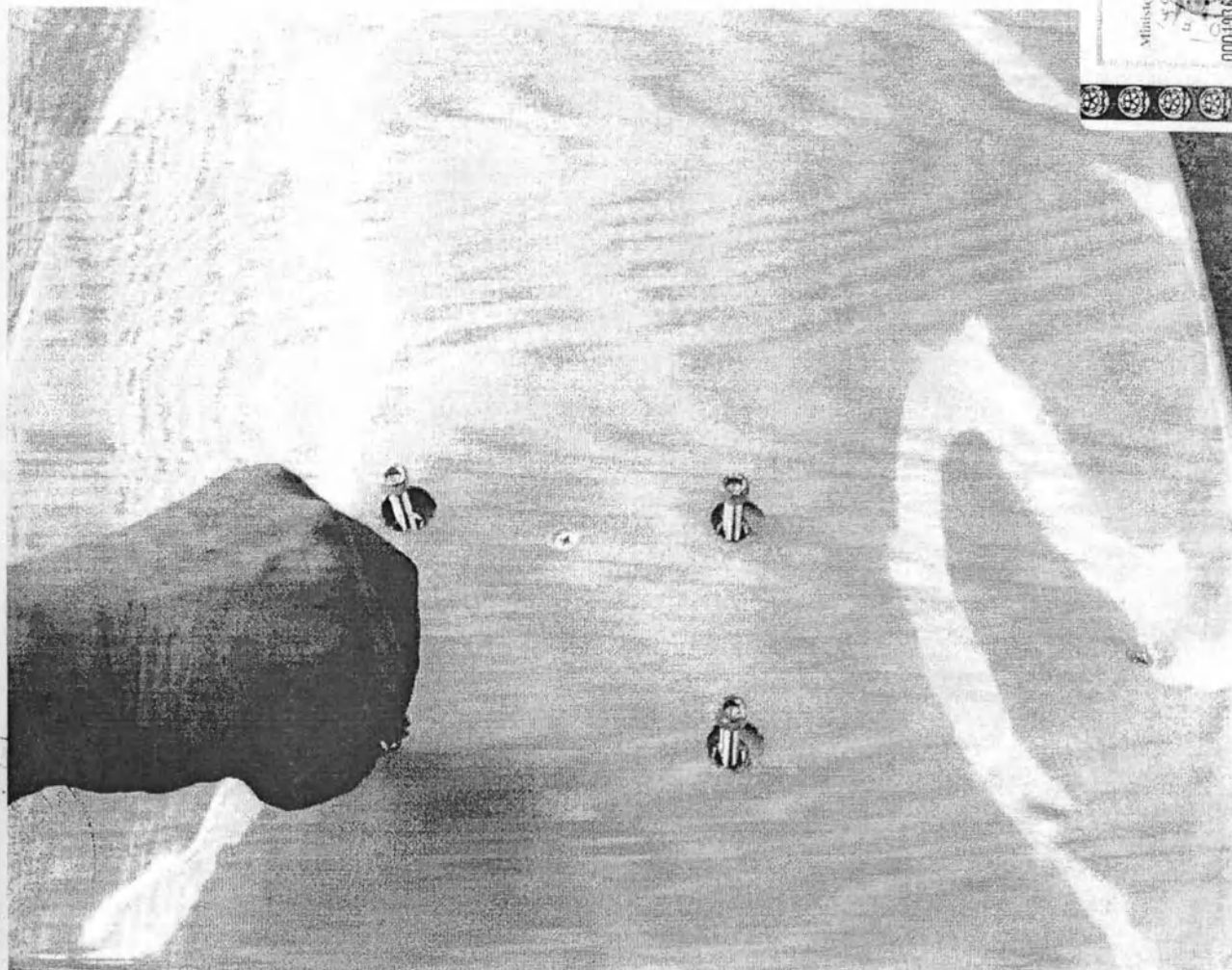


FIGURA 2 – PICTURE 2 – PHOTO 2

**AVVITARE PARZIALMENTE LE VITI IN DOTAZIONE NEGLI APPOSITI FORI
FILETTATI PRESENTI SULLO SCHIENALE (VEDI FIGURA 2) – PLEASE, SCREW PARTIALLY
THE SCREWS TO EQUIP INTO THE APPROPRIATE THREADED HOLES, WHICH ARE ON THE BACKREST (PICTURE N° 2) –
VEUILLEZ VISSER PARTIELLEMENT LES VIS EN DOTATION AUX TROUX FAITS EXPRES FILETÉS QUI SE TROUVENT SUR LE
DOSSIER (VOICI LA PHOTO N° 2)**

Euroclinic Viale dell'artigianato, 305/319 48014 Castelbolognese ITALIA	User Manual Release N° 01 Dtd 07/05/2003	ROLFMED OTO P/I 10/12
--	--	---------------------------------

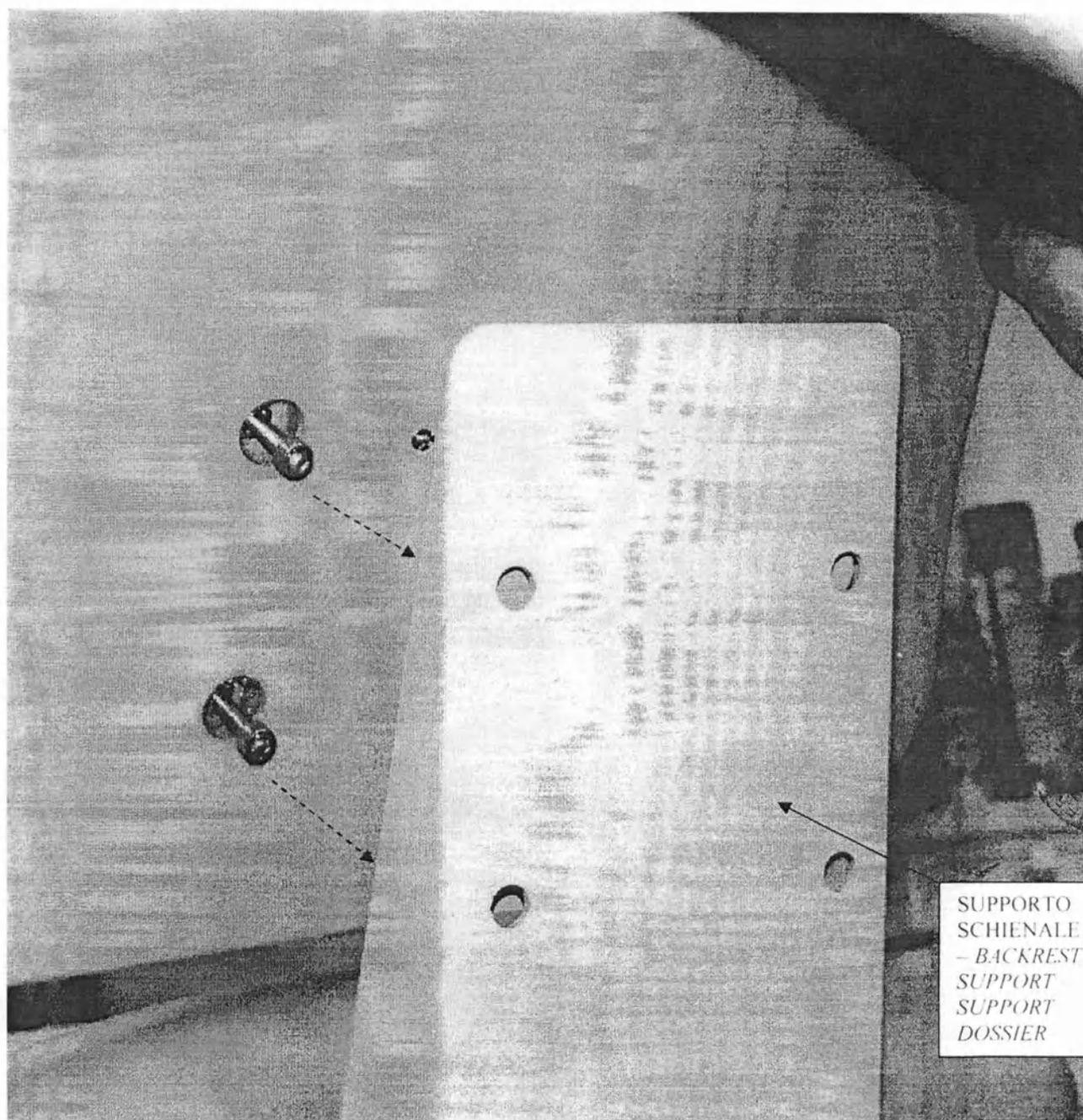


FIGURA 3 – PICTURE 3 – PHOTO 3

- **INTRODURRE LE TESTE DELLE VITI PREMONTATE NEI FORI CORRISPONDENTI DEL SUPPORTO SCHIENALE (VEDI FIGURA 3) – PLEASE INTRODUC T SCREWS TOPSIDES MOUNTED PREVIOUSLY INTO THE CORRESPNDENT HOLES OF BACKREST SUPPORT (PICTURE N° 3) – VEUILLEZ INTRODUIRE LES DESSUS DES VIS ASSEMBLES PRÉCÉDEMMENT AUX TROUX CORRESPONDENTS DU SUPPORT DOSSIER (PHOTOS N° 3)**

Euroclinic

Viale dell'artigianato,
305/319
48014 Castelbolognese
ITALIA

User Manual
Release N° 01
Dtd 07/05/2003

ROLFMED
OTO P/I 11/12

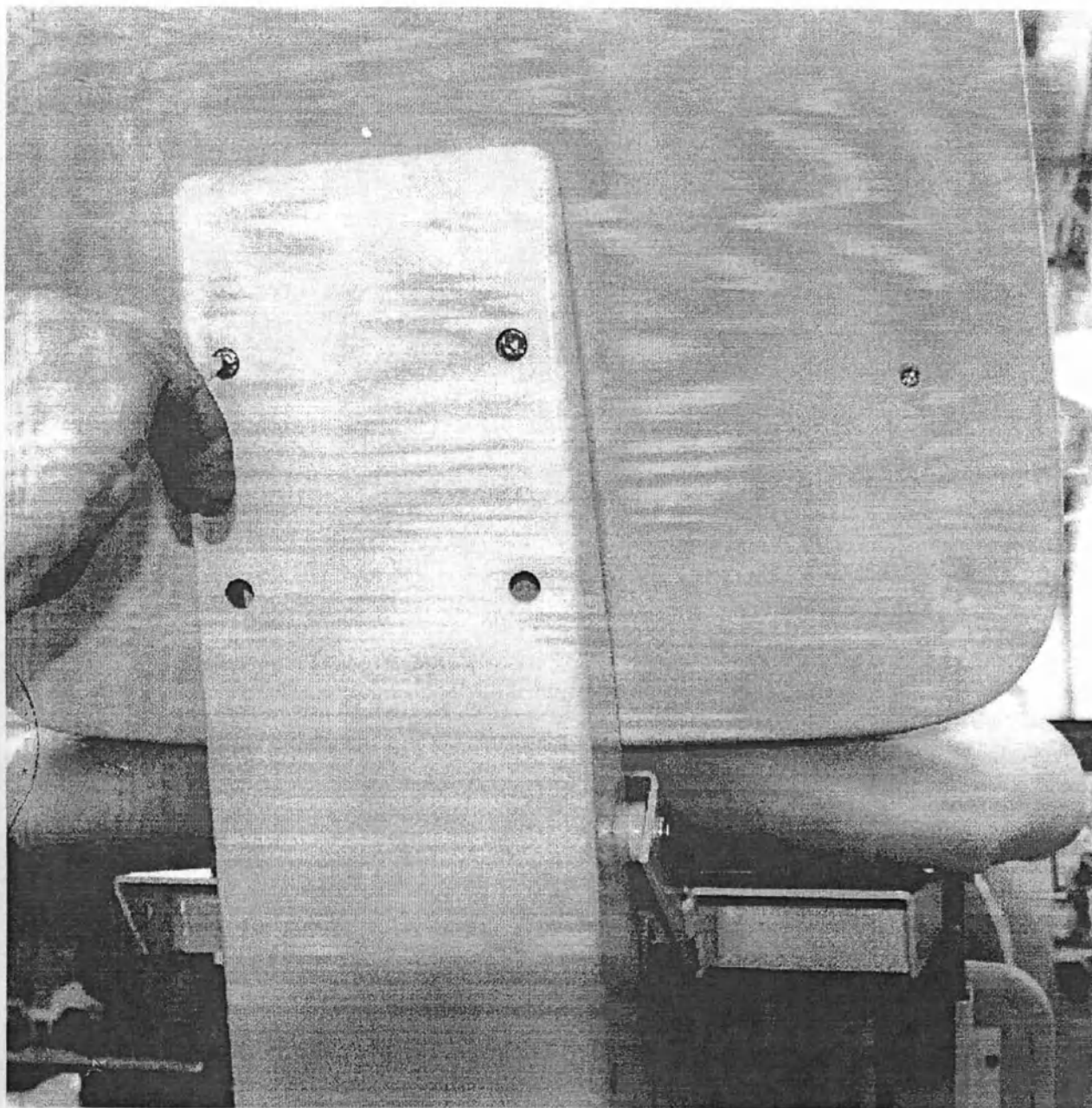


FIGURA 4 – PICTURE 4 – PHOTO 4

**AVVITARE LE VITI CON LA CHIAVE IN DOTAZIONE FINO A SERRARE LO
SCHIENALE AL SUPPORTO (VEDI FIGURA 4) – PLEASE, SCREW THE SCREWS BY THE WRENCH TO**

**EQUIP UNTIL YOU CLOSE THE BACKREST TO THE SUPPORT (PICTURE N° 4) – VEUILLEZ VISSER LES VIS EN UTILISANT LA
CLÉ EN DOTATION JUSQU'À FERMER LE DOSSIER AU SUPPORT (VOICI LA PHOTO N° 4)**

Euroclinic Viale dell'artigianato, 305/319 48014 Castelbolognese ITALIA	User Manual Release N° 01 Dtd 07/05/2003	ROLFMED OTO P/I 12/12
--	--	---------------------------------

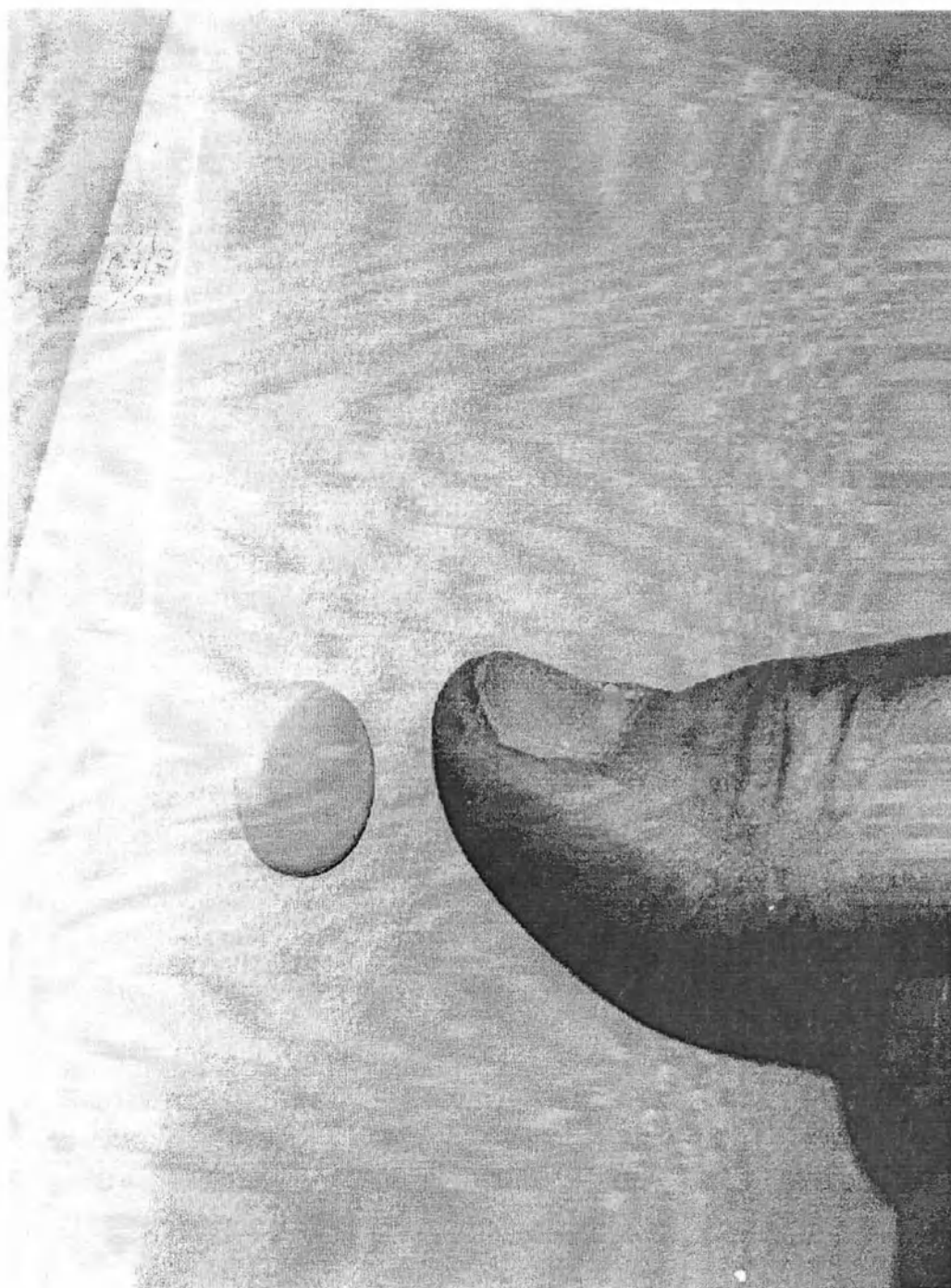


FIGURA 5 – PICTURE 5 – PHOTO 5

- **COPRIRE CON I TAPPI GRIGI IN DOTAZIONE I FORI DI FISSAGGIO (VEDI FIGURA 5) – PLEASE, COVER THE FIXING HOLES BY THE GREY PLUGS TO EQUIP (PICTURE N° 5) –**
VEUILLEZ COUVRIR LES TROUX DE FIXATION EN UTILISANT LES BOUCHON GRIS EN DOTATION (PHOTO N° 5)

Euroclinic



EUROCLINIC S.R.L. Unipersonale
Via dell'Artigianato, 305/319
48014 CASTELBOLOGNESE (RA)
P.IVA 02110630395

TECHNICAL SPECIFICATIONS "OTOPI" :

LIFTING PUMP PUSH: 3000 N
BACKREST PUSH: 800 N
LIFTING CAPACITY: 145 Kg.



MEASUREMENTS:

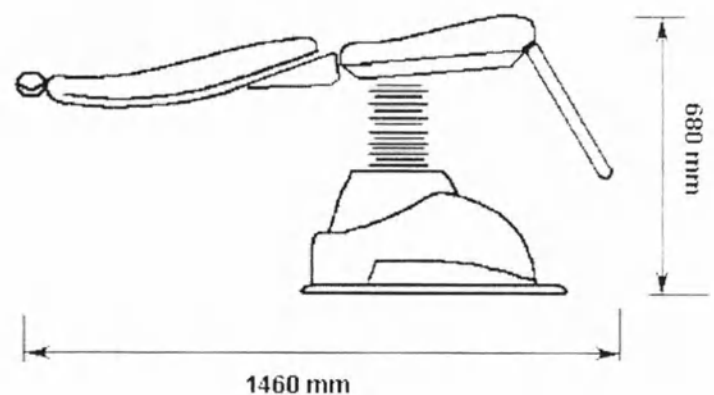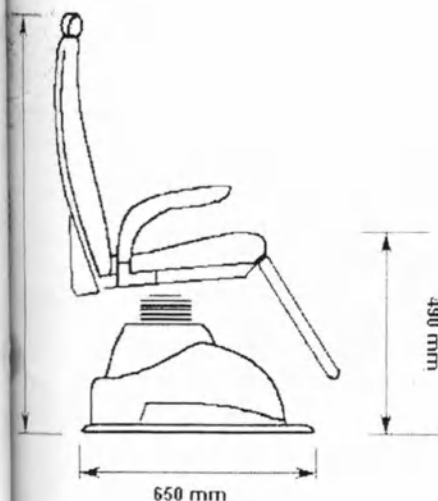

EUROCLINIC S.r.l.
Unipersonale
Via dell'Artigianato 305/319
48014 Castelbolognese(RA)

Telefono
++39 0546 656031 10 linee ra-
Fax
++39 0546 656691

Web site:
www.euroclinic.it
e-mail:
info@euroclinic.it

P.I. 02110630395
N.° Mecc.
REA 172443



EUROCLINIC S.r.l. Unipersonale
Uffici operativi e produzione
Via Dell'Artigianato 305/319
48014 Castalbolognese (RA)
Telefono ++39 0546 656031 10linee ra
Fax ++39 0546 656691
Web site: www.euroclinic.it
e-mail: info@euroclinic.it
P.IVA e Cod. fisc.:02110630395

Dichiarazione di conformità

Declaration of conformity



Poltrona per Otorinolaringoiatria:
Otorhinolaryngology Chair

OTO P/I

Dispositivo Medico Classe I
Medical Device Class I

N° matricola :
Serial Number :

E' conforme ai requisiti della direttiva 93/42/CEE
Is in conformity with the provisions of Council Directives 93/42/EEC

Sono state applicate le seguenti norme:
The following harmonised rules have been followed:

EN 60601.1
Del 1998

UNI CEI EN ISO 14971
del 2004

EN 60601-1-2
del 2004

EN 980
del 2003

EUROCLINIC S.R.L. Unipersonale
Via dell'Artigianato, 305/319
48014 CASTELBOLOGNESE (RA)
P.IVA 02110630395

Il Direttore Generale
Maurilio Longo



EUROCLINIC S.R.L. Unipersonale
Via dell'Artigianato, 305/319
48014 CASTELBOLOGNESE (RA)
P. IVA 02110680385